

**Фотографическое изображение медицинского изделия**  
**Устройство для подогрева растворов RANGER с принадлежностями**



Рис.1. Устройство для подогрева инфузионных растворов RANGER.



Рис.2. Устройство для подогрева ирригационных растворов RANGER.

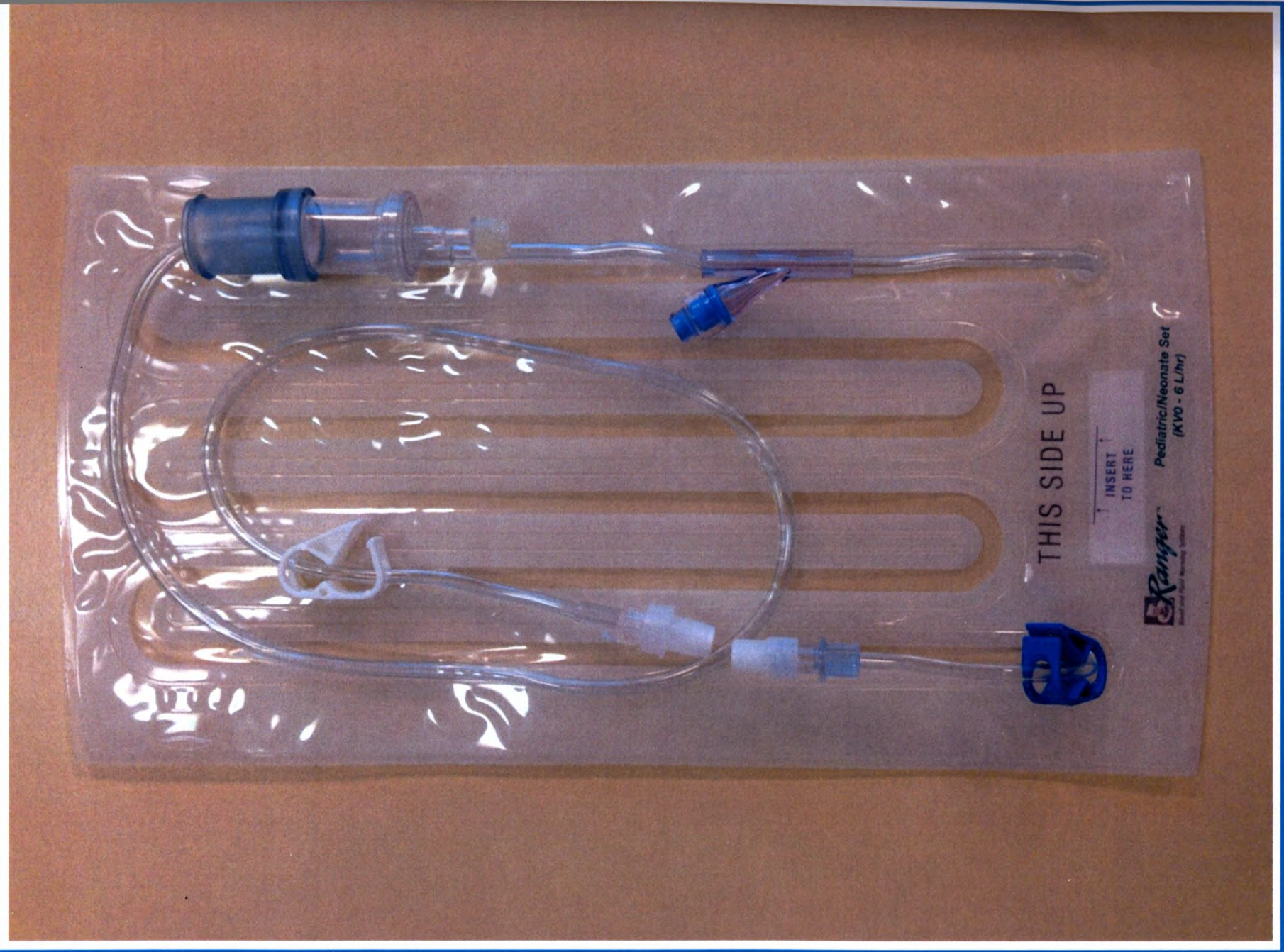
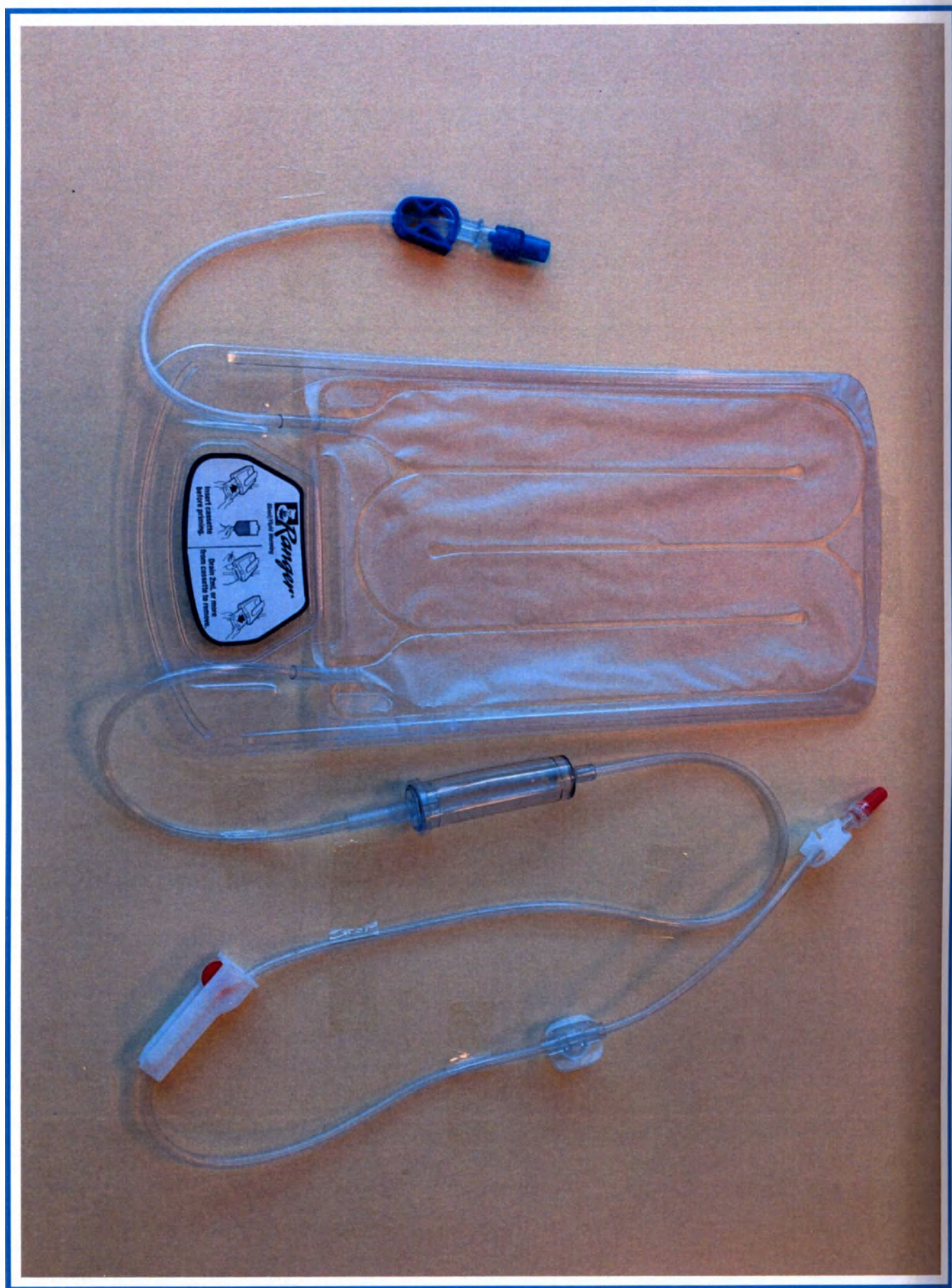
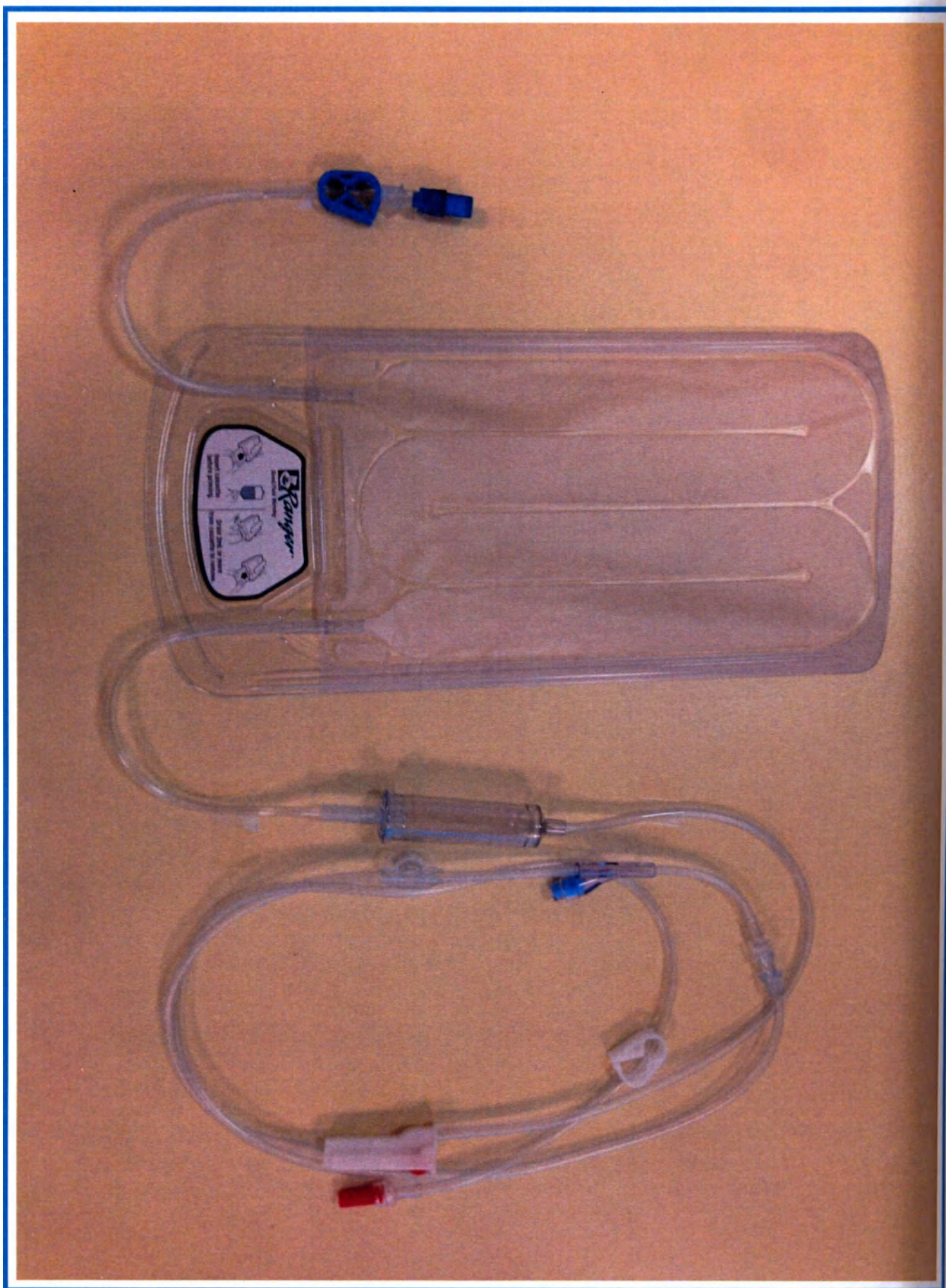
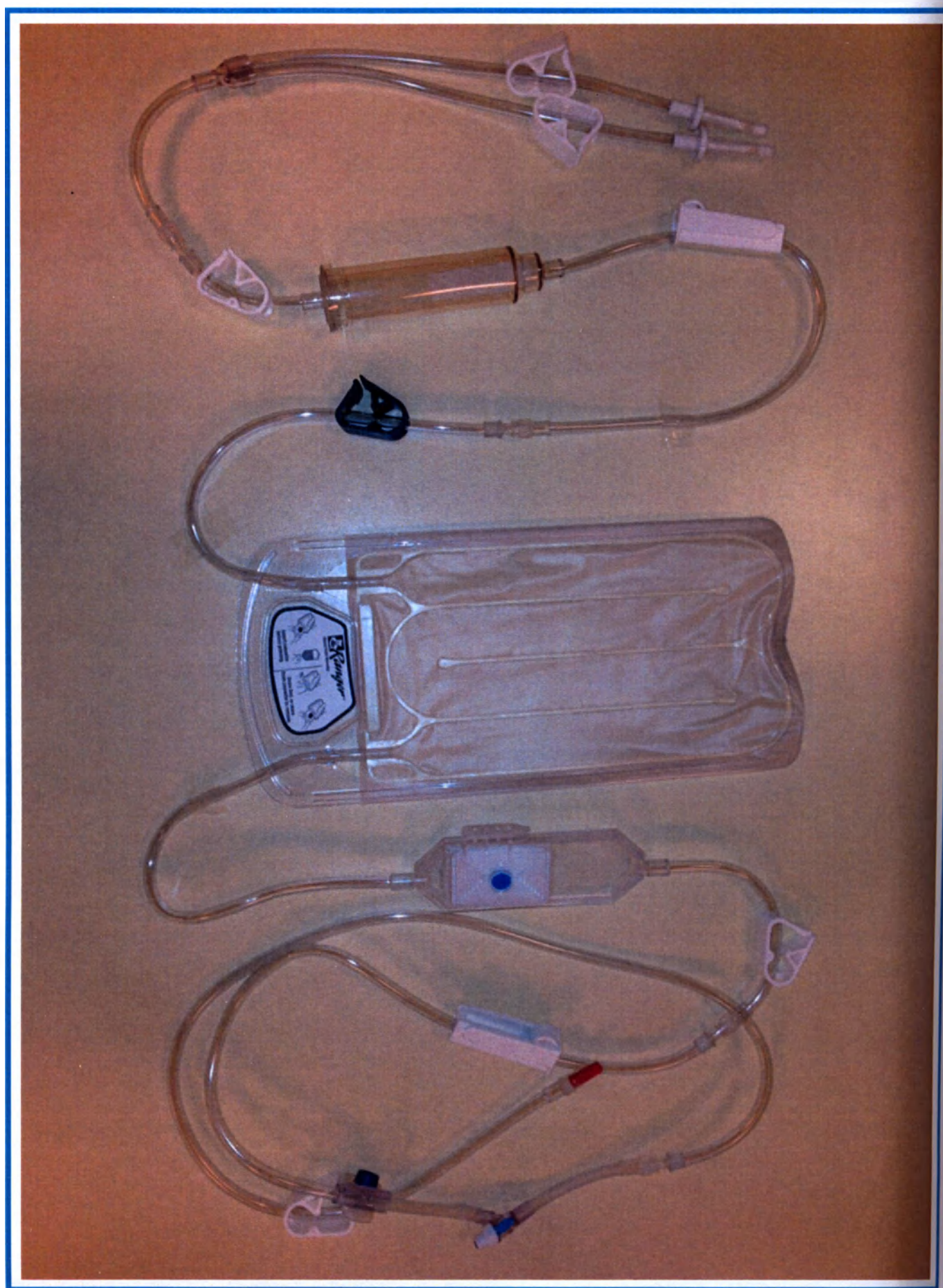


Рис.3. Кассета педиатрическая инфузионная одноразовая с портом для аспирации воздуха







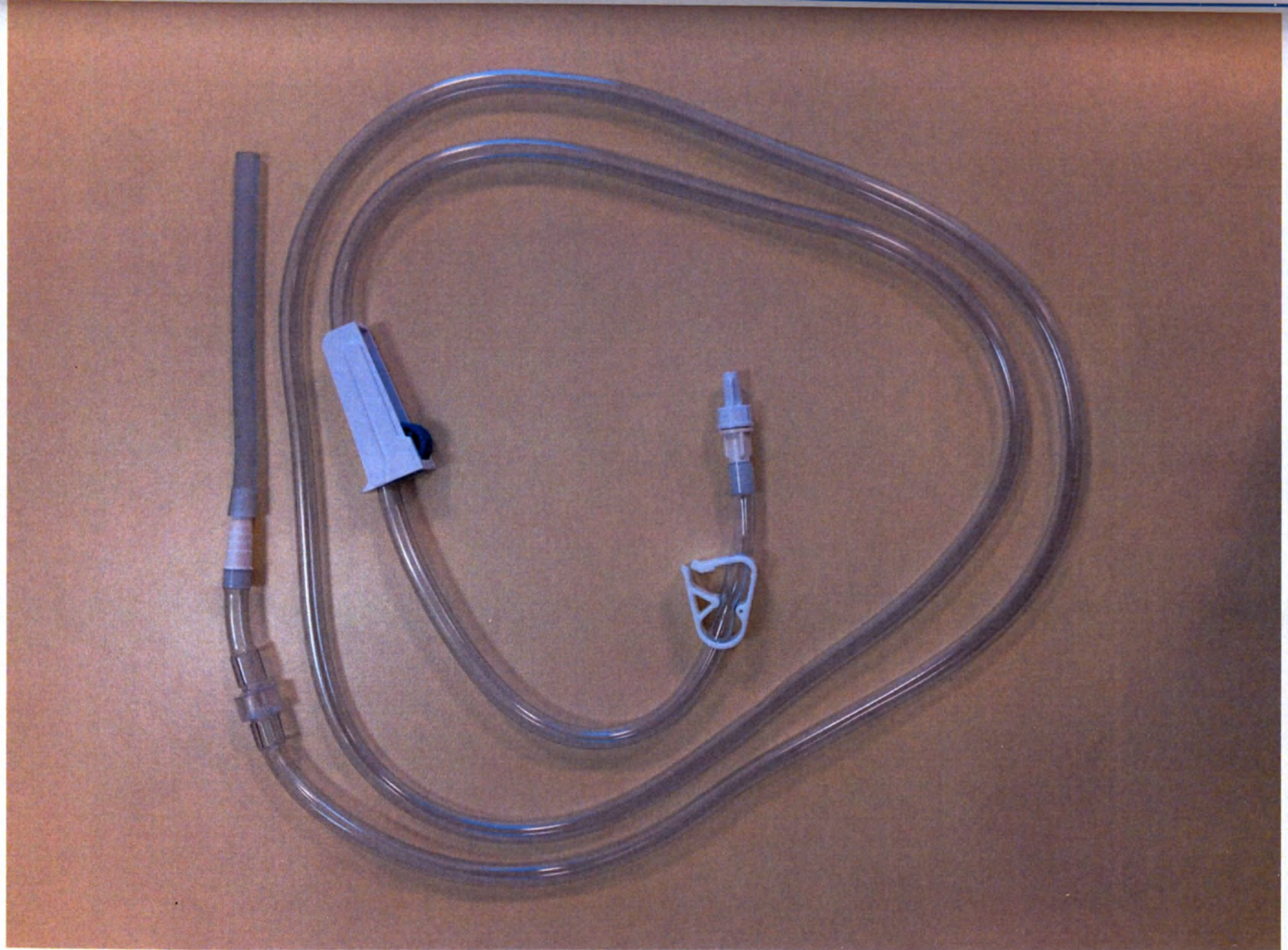
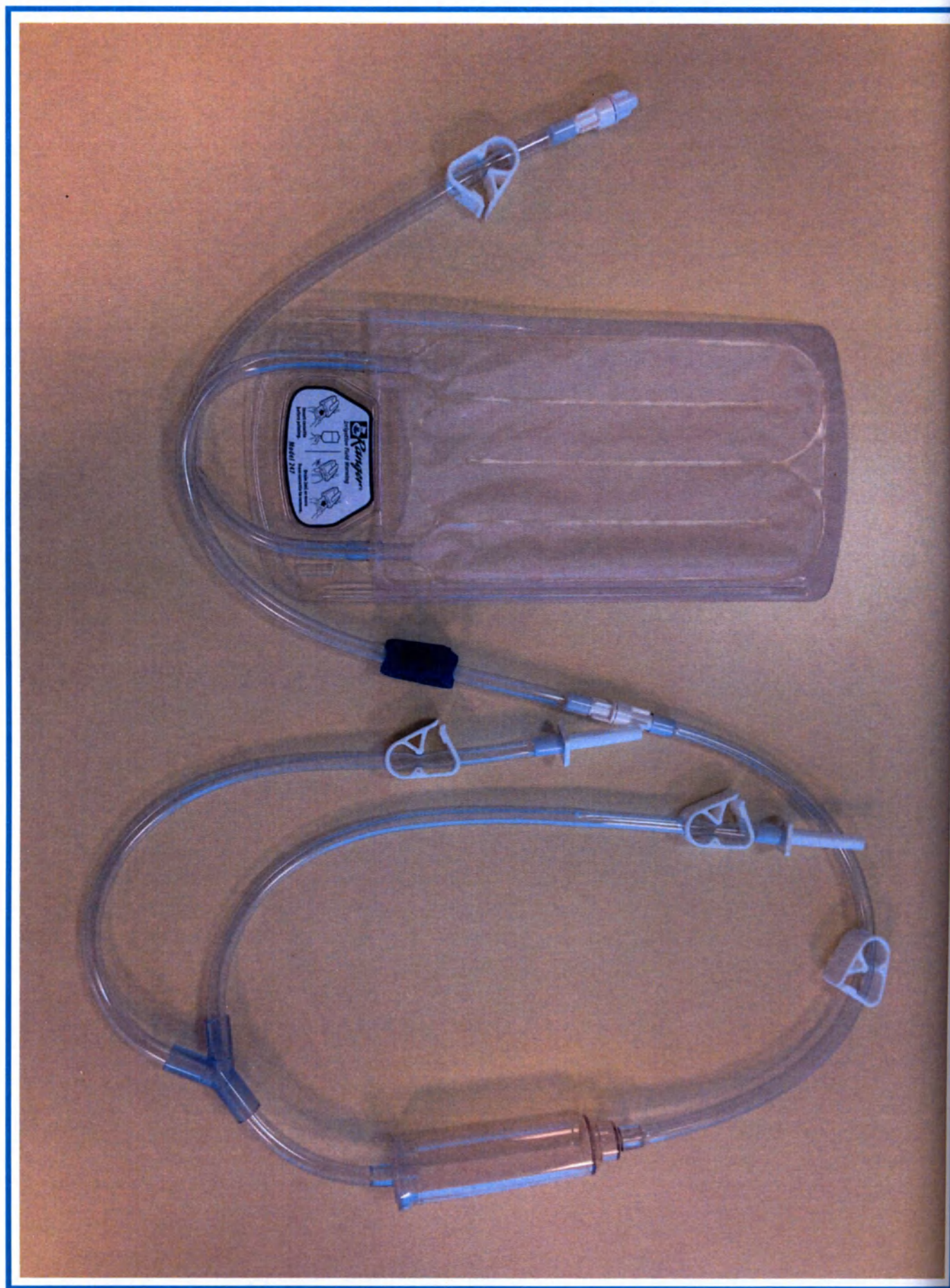


Рис 7. Линия пациента ирригационная универсальная




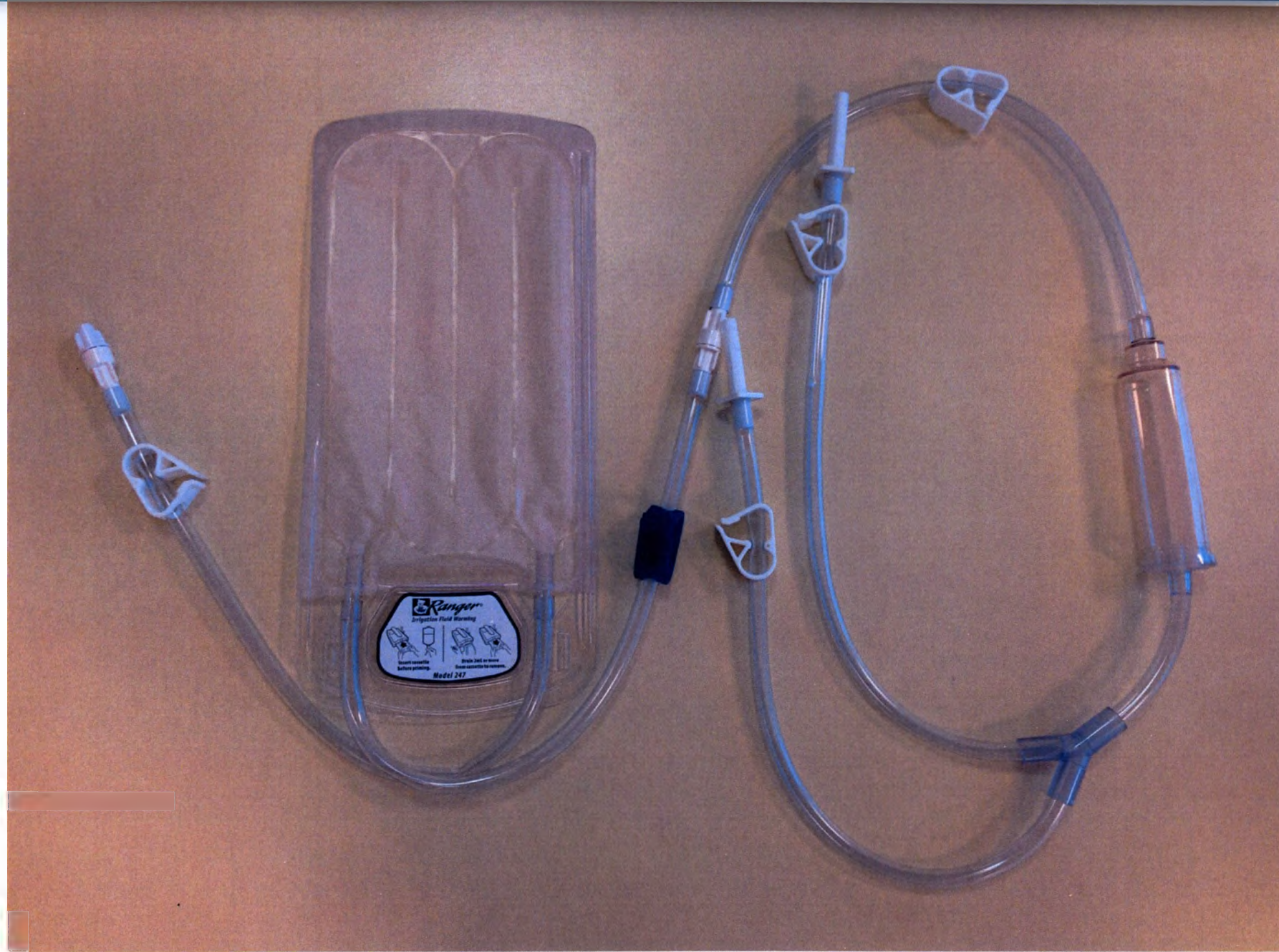


Рис. 9. Кассета ирригационная одноразовая стандартная





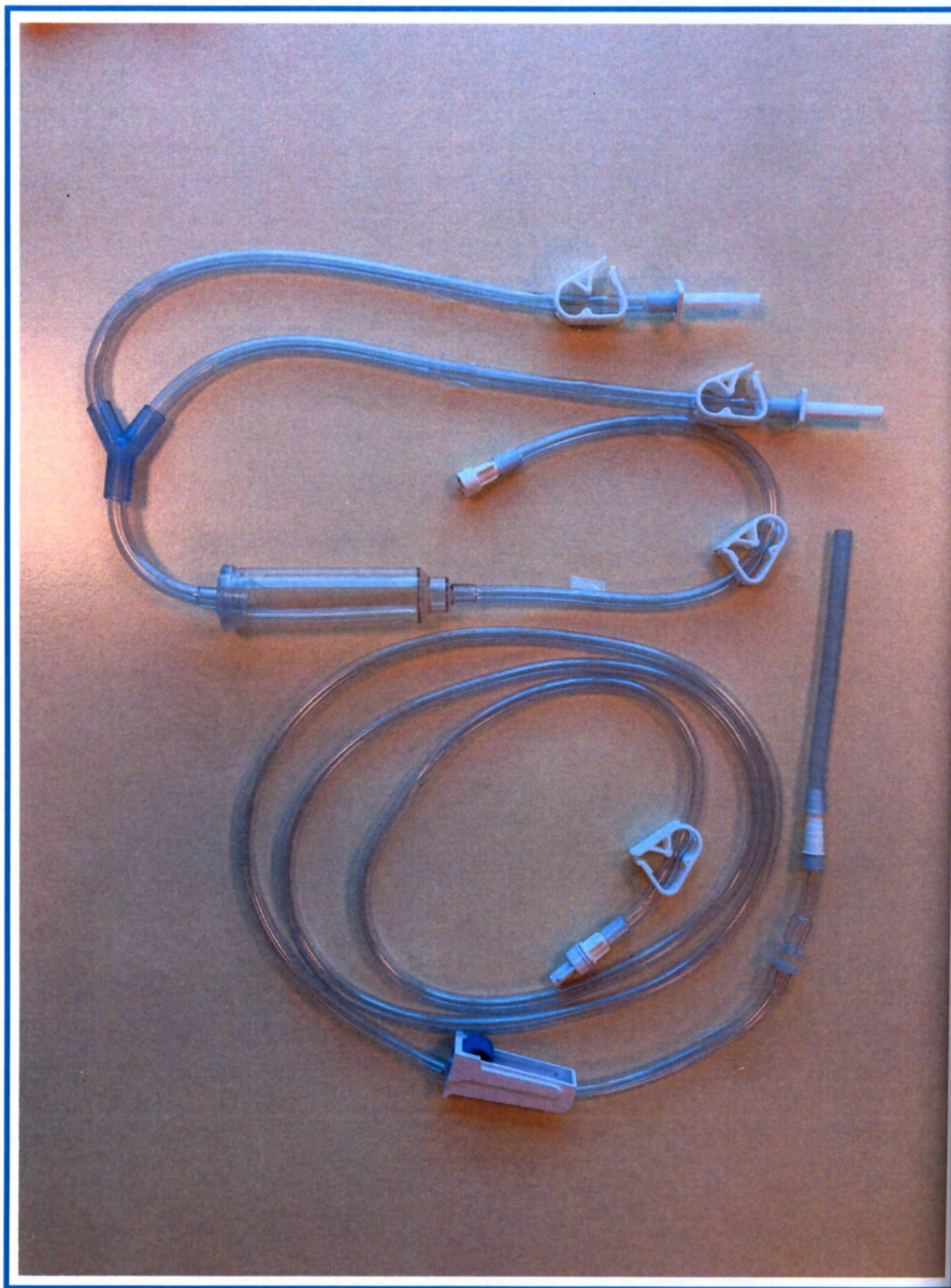

#### CLEANING TOOL

For use only with the Ranger warming unit.

The Ranger cleaning tool is intended to clean both heating plates of the warming unit.

#### CAUTION

• Do not allow spills to dry inside the unit, as this may make it more difficult to clean the unit.

• The cleaning tool provides only superficial cleaning—it does not disinfect or sterilize the interior of the unit.

#### INSTRUCTIONS

- 1) Unplug the warming unit.
- 2) Unfold the cleaning tool. Wet the foam pads with a nonabrasive solution, such as Alconox brand detergent.
- 3) Insert the tool from the back of the unit and pull it out from the front. See figures a and b.
- 4) Rinse the tool with water and repeat 3 times.
- 5) Wipe off the unit to remove excess fluid.



**NOTE:** If the cleaning tool cannot be inserted through the slot because of excess dried-on fluid, send the unit to a biomedical technician.

Alconox is a registered trademark of Alconox, Inc.

©2003 Arizant Healthcare Inc. All rights reserved.

30293 West 70th St., Eden Prairie, MN 55344 USA


TEL 800-713-7771 • 952-942-1200 • FAX 952-942-1400

\*The Bair Hugger design and Ranger are trademarks of Arizant Healthcare Inc., registered U.S. Pat. & To. Off.

and in other countries.

Patent pending.

241418A 02/03

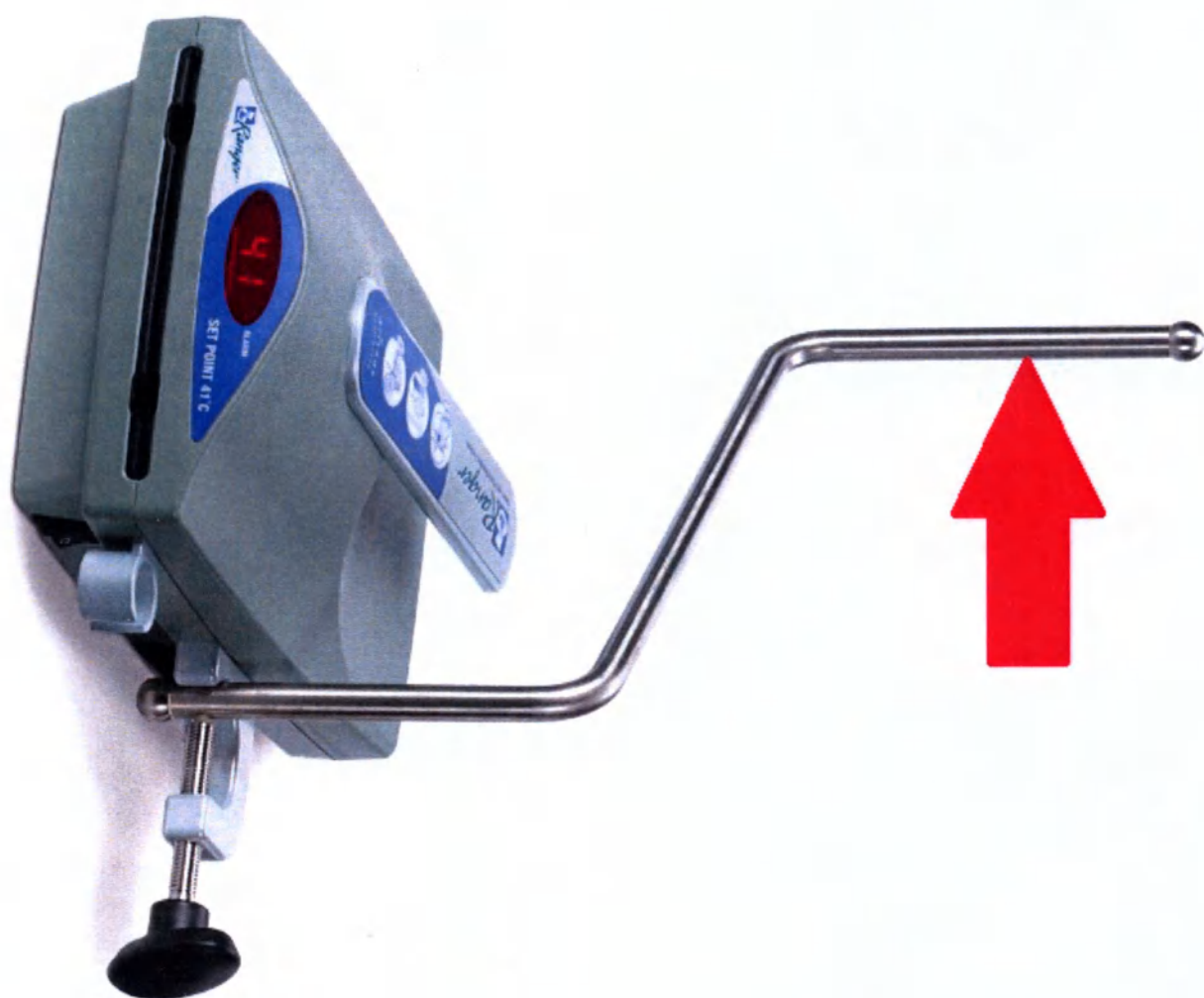

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
14 листа(ов).

Должность, Старший эксперт по сертификации  
Отдела Здравоохранения ЗАО «ЗМ Россия»



(подпись)

Репина А.А.  
М.П.