


«УТВЕРЖАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «ОЗЗ «ВладМиВа»

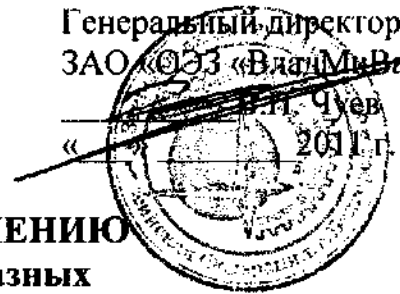

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
дисков зуботехнических алмазных
ТУ 9433-123-45814830-2010

НАЗНАЧЕНИЕ

Диски алмазные зуботехнические предназначены для сепарации, контуровки и резания керамики, металлокерамики, металлов, твердых пластмасс, гипса, а также имитации межзубных щелей, препарирования и чистовой обработки твердых тканей зуба и пломбировочных материалов.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Конструкция дисков с пазами и отверстиями разных конфигураций позволяет:

- эффективно удалять продукты резания из зоны обработки, значительно улучшать обзор и охлаждение обрабатываемой поверхности;
- создавать тонкие межзубные щели;
- с высокой точностью сепарировать не только керамику, но и металл, детали небольшой толщины.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Диски применяют в соответствии с общепринятыми методиками обработки твердых тканей зуба, керамики, металлокерамики, металлов, твердых пластмасс, гипса.

Безопасность применения дисков обеспечивается при скорости не более 10 000 об/мин.

ФОРМА ВЫПУСКА

Диски одного типоразмера

- 25 шт.

Индивидуальная ячейка для дисков

- 5 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности не ограничен.