

Масштаб 1:1

Размеры 75x90 мм



Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель: АО "Елатомский приборный завод"

Россия, 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com, INTERNET: www.elamed.com

Контейнер для биоброб 60 мл (без лопатки) по
ТУ 9398-021-24320270-2004

Регистрационное удостоверение №

№ партии

Дата изготовления

Руководство по эксплуатации

Основные параметры и характеристики:

- габаритные размеры, мм, не более: диаметр – 56, высота – 60;
- масса, не более 15 г;
- номинальная вместимость, не менее 60 мл;
- крышка герметично фиксируется на горловине стакана контейнера;
- поверхность зоны стакана контейнера для нанесения сведений выполнена под шагрень;
- температура окружающего воздуха при эксплуатации от +10 до +35 °С, при транспортировке от -50 до +50 °С, при хранении от +5 до +40 °С;
- срок годности – не менее 3-х лет с даты изготовления.

Правила эксплуатации:

- упаковку вскрыть только непосредственно перед применением контейнера;
- извлечь контейнер из упаковки;
- снять крышку, вывинчивая ее против часовой стрелки;
- поместить биоматериал в стакан контейнера;
- установить крышку, завинтив ее по часовой стрелке до упора.


Сведения о пациенте (Ф.И.О.), дата приема биоматериала наносится в зоне, выполненной под шагрень, маркером.

Доставить пробу в лабораторию.

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

Утилизация: После использования по назначению контейнер подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».

Однократное применение
Для in vitro диагностики
НЕСТЕРИЛЬНО

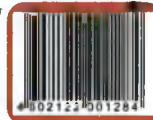

A

КОПИЯ
ВЕРНА



PANTONE 355 C



Фон участка А - Белый

Штрих-код выполнить черным цветом на белом фоне

ОМ № 23.250.01

Масштаб 1:1

Размеры 75x90 мм



Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель: АО "Елатомский приборный завод"

Россия, 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57

E-mail: admin@elamed.com

INTERNET: www.elamed.com

Контейнер для биоброб 60 мл (с лопаткой) по

ТУ 9398-021-24320270-2004

Регистрационное удостоверение №

№ партии

Дата изготовления

Руководство по эксплуатации

Основные параметры и характеристики

- габаритные размеры, мм, не более: диаметр – 56, высота – 60;

- масса, не более 15 г;

- номинальная вместимость, не менее 60 мл;

- крышка герметично фиксируется на горловине стакана контейнера;

- поверхность зоны стакана контейнера для нанесения сведений выполнена под шагрень;

- температура окружающего воздуха: при эксплуатации от +10 до +35 °С, при транспортировке от

-50 до +50 °С, при хранении от +5 до +40 °С;

- срок годности – не менее 3-х лет с даты изготовления

Правила эксплуатации

- упаковку вскрыть только непосредственно перед применением контейнера;

- извлечь контейнер из упаковки;

- снять крышку, вывинчивая ее против часовой стрелки;

- поместить биоматериал в стакан контейнера, при необходимости использовать палочку

- установить крышку, завинчивая ее по часовой стрелке до упора

Сведения о пациенте (Ф.И.О.), дата приема биоматериала наносится в зоне, выполненной

под шагрень, маркером

Доставить пробу в лабораторию

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

Утилизация: После использования по назначению контейнер подлежит

утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10

для отходов класса «Б».

Однократное применение

Для in vitro диагностики

НЕСТЕРИЛЬНО



A

КОПИЯ
ВЕРНА



PANTONE 355 C



Фон участка А - Белый

Штрих-код выполнить черным цветом на белом фоне

ОМ № 23.245.01