

# Инструкция по сборке изделия Кушетка физиотерапевтическая КФ-01-"ЕЛАТ"

## Комплект поставки изделия

### Документация:

1. Руководство по эксплуатации.
2. Инструкция по сборке.

### Упаковка:

Транспортная упаковка.

### Условные обозначения:




1. А-Л : детали
2. 1 - 12 : крепёж и фурнитура
3. 1 - 6 : этапы сборки



## Детали


| № | Наименование                  | Кол - во |
|---|-------------------------------|----------|
| А | Боковина                      | 1        |
| Б | Боковина                      | 1        |
| В | Брус поперечный               | 4        |
| Г | Ручка                         | 1        |
| Д | Продольная планка перекладины | 1        |
| Е | Поперечная планка перекладины | 2        |
| Ж | Ножка                         | 2        |
| З | Ножка                         | 2        |
| И | Поперечина рамы               | 2        |
| К | Опора                         | 2        |
| Л | Ложе                          | 1        |

## Крепёж и фурнитура
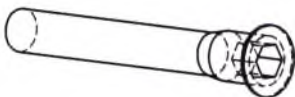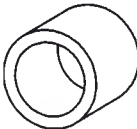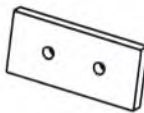
| Арт. | Кол - во | Обозначение             |                                                                                       |
|------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | 14       | Евровинт                |    |
| 2.   | 12       | Заглушка                |    |
| 3.   | 2        | Втулка                  |    |
| 4.   | 16       | Болт<br>мебельный       |     |
| 5.   | 16       | Гайка<br>колпачковая М8 |    |
| 6.   | 16       | Шайба 8                 |   |
| 7.   | 8        | Прокладка               |  |
| 8.   | 8        | Болт М6х45              |  |
| 9.   | 8        | Шайба 6                 |  |
| 10.  | 1        | Винт М4х16              |  |
| 11.  | 1        | Гайка М4                |  |
| 12.  | 8        | Саморез<br>3,5х35       |   |


1 этап

Схема сборки изделия

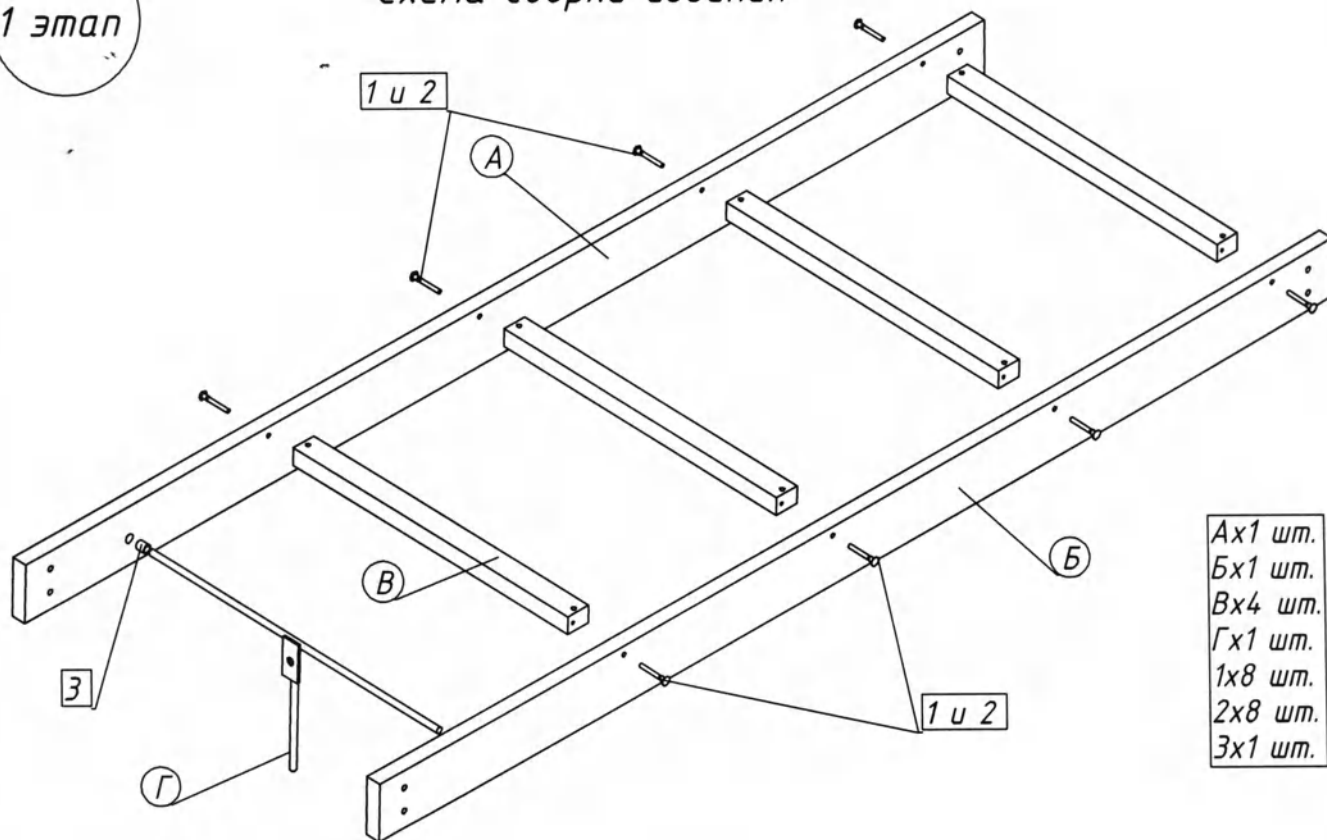


2 этап


Ех2 шт.  
Дх1 шт.  
1х2 шт.

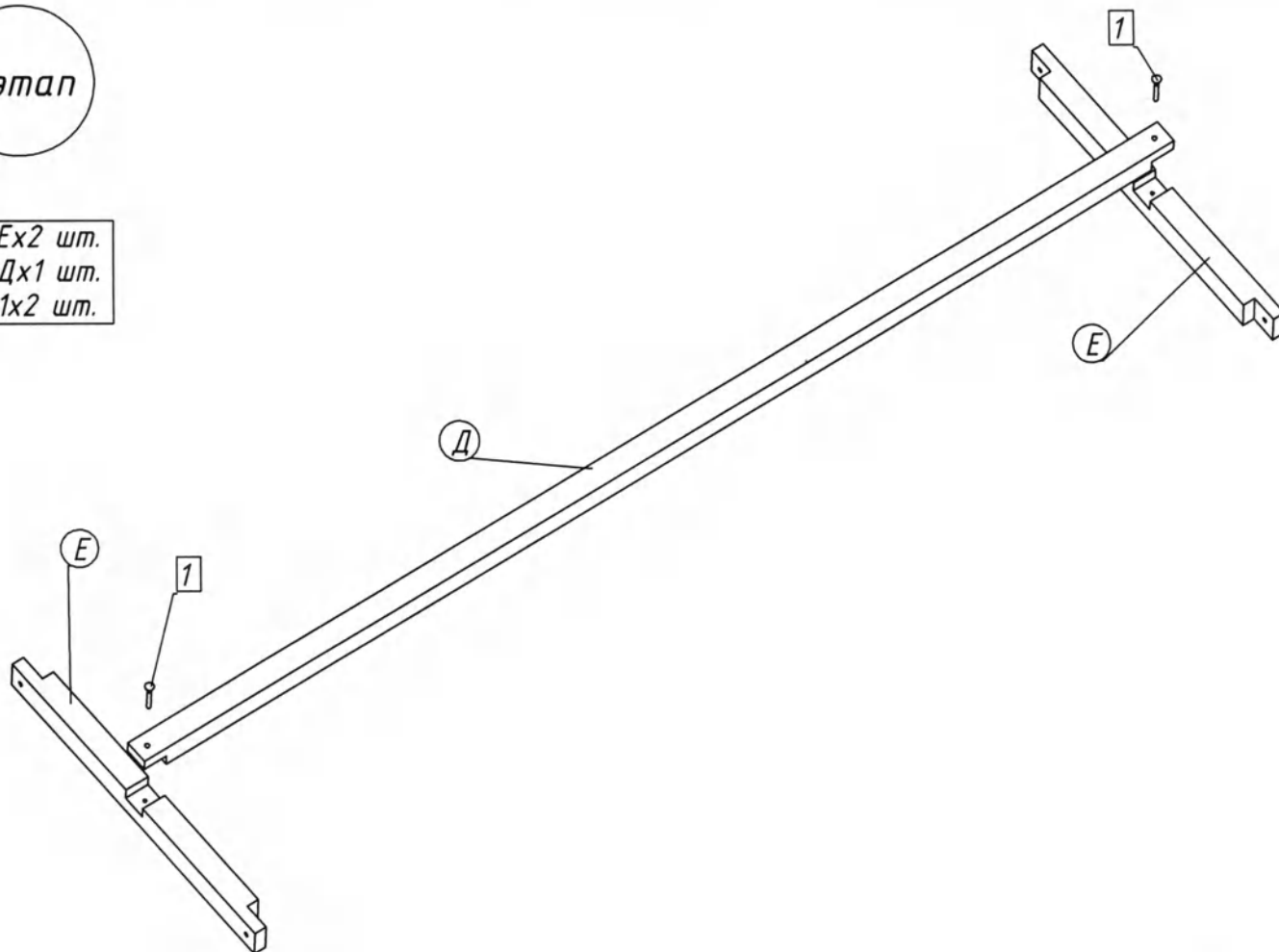

3 этап

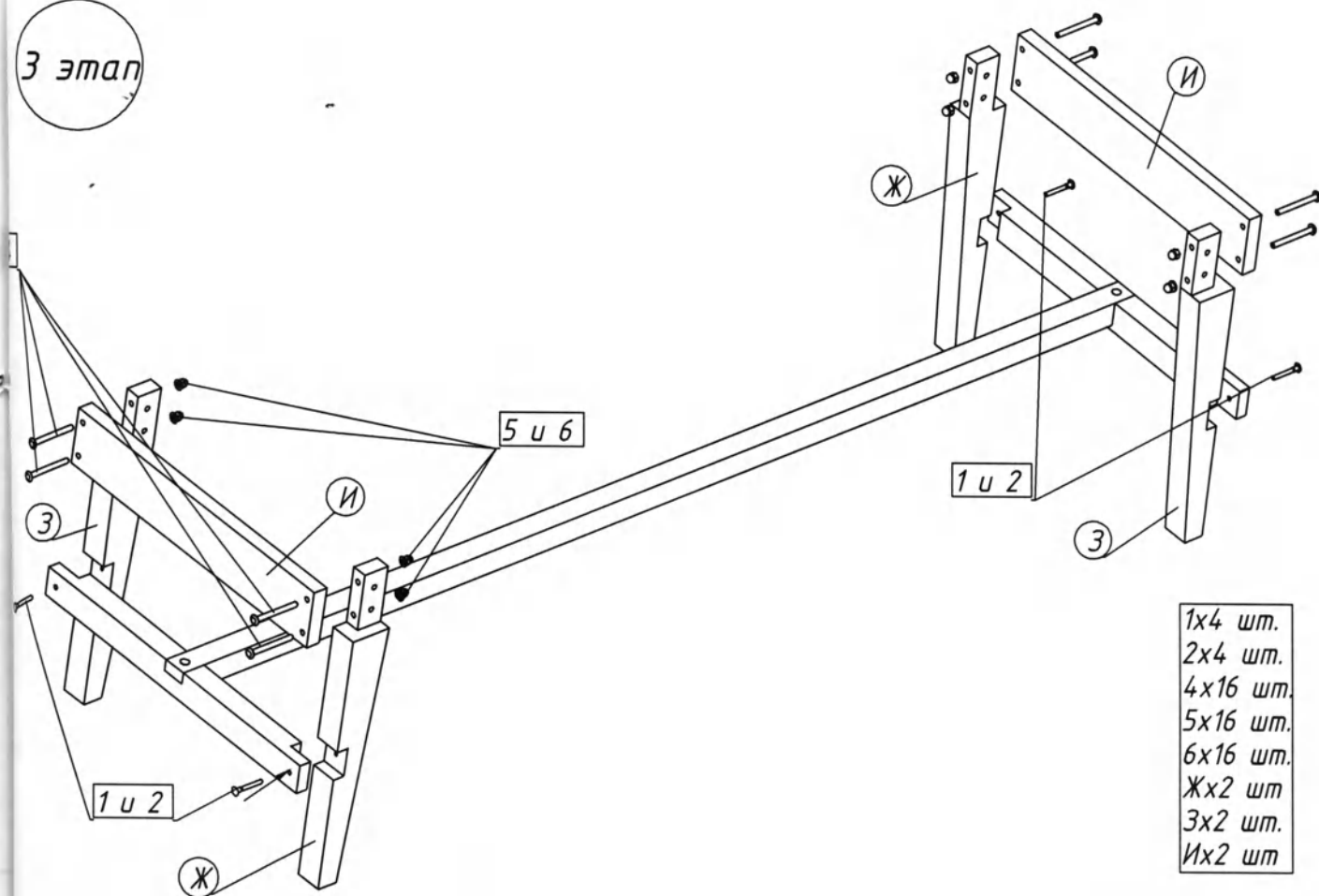


4 этап

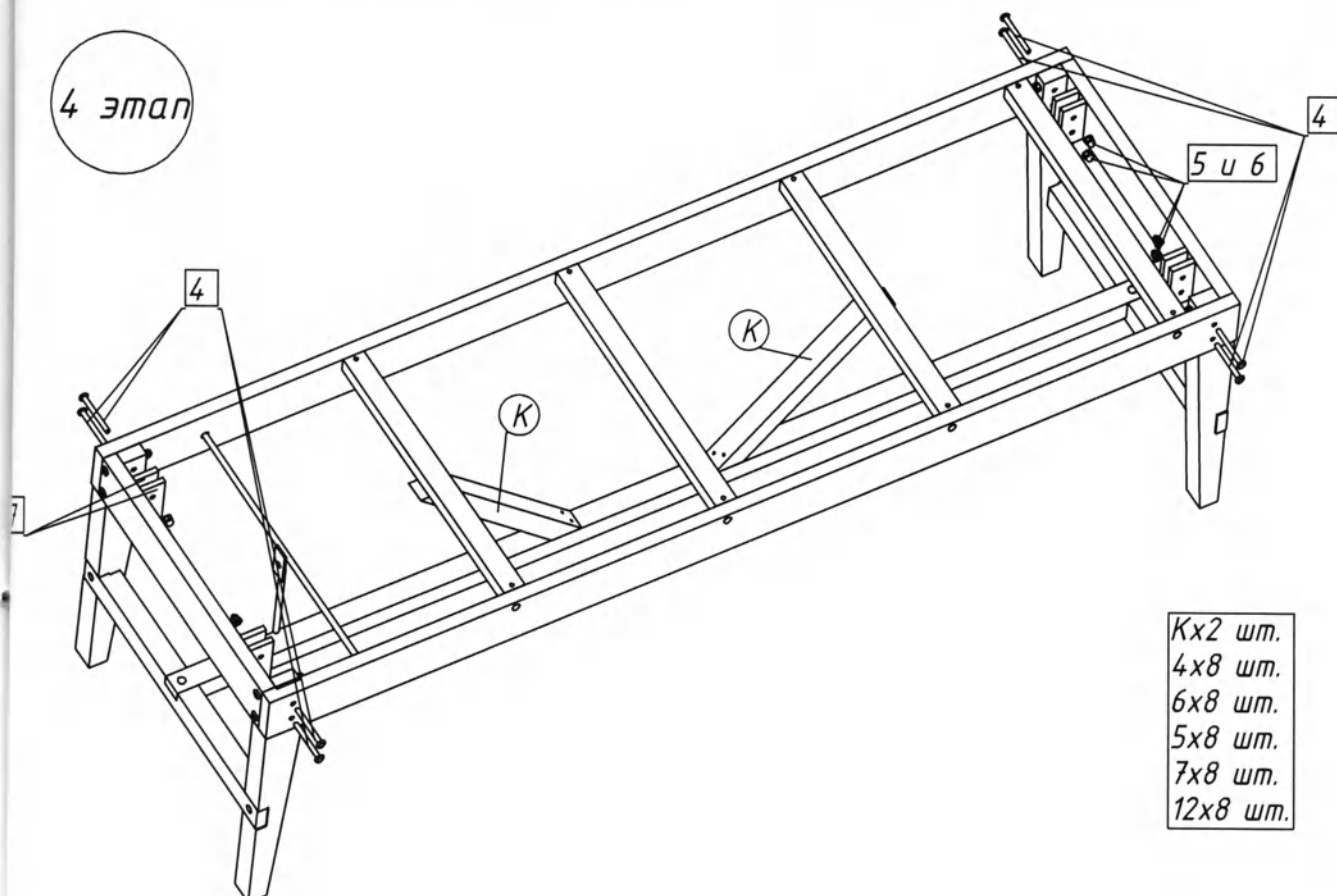


Опооры К крепить саморезами 12.

5 этап

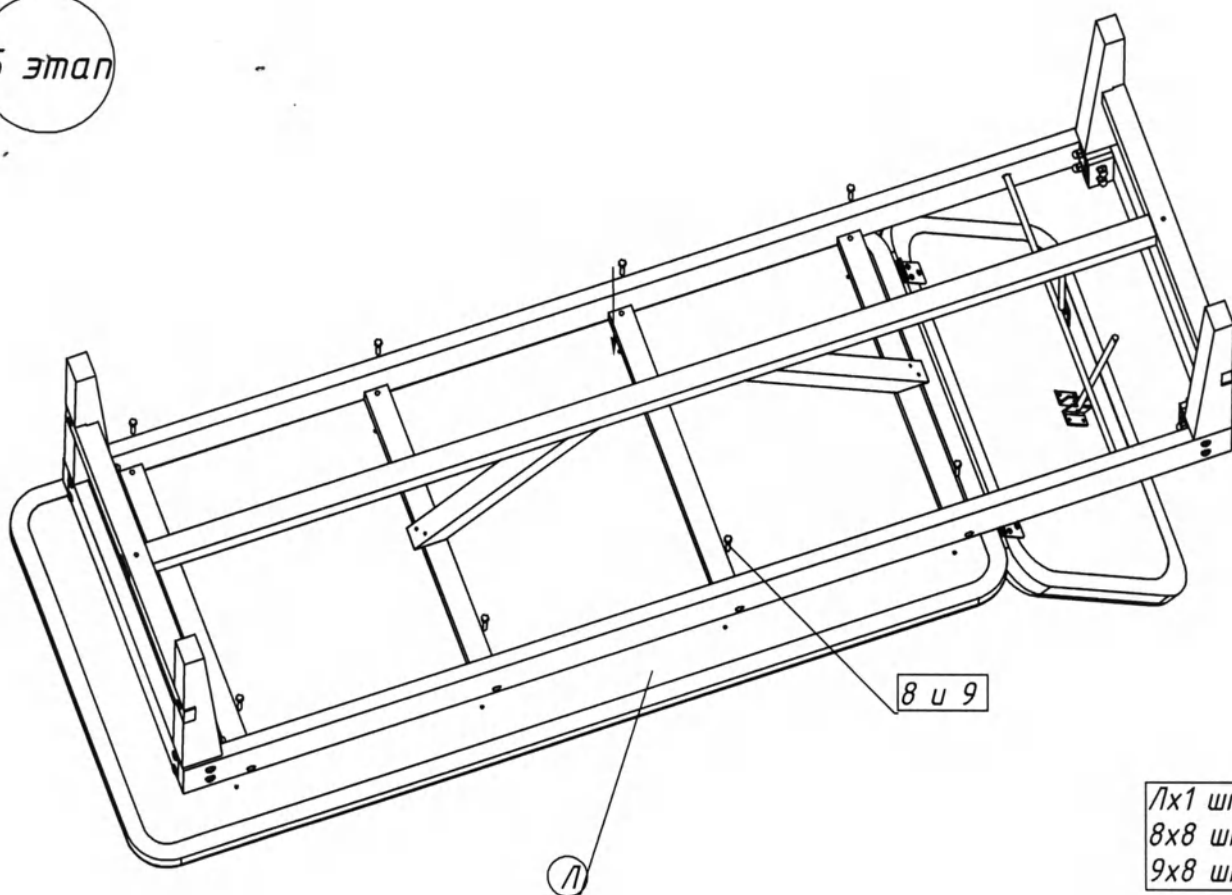

6 этап

Вставьте шток основания  
в отверстие на планке  
ручки Г

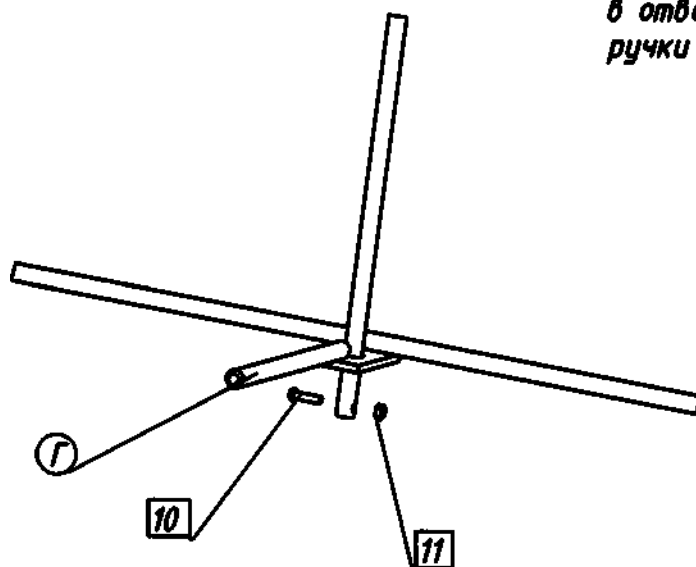

|          |
|----------|
| 10x1 шт. |
| 11x1 шт. |

печатью 5 листа(ов).

Директор НТЦ АО «ЕПЗ»

(подпись)

« — »

20

года

