



mtp medical technical promotion gmbh

Юнни Верне

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«Инструмент режущий»

Петля: 011114-10.

Электрод: 011115-10, 011116-10, 011117-10.

Нож: 091112-05, 091115-05, 091210-10, 091211-10, 091220-10, 091221-10.



mtp medical technical promotion gmbh

Производитель

«мтп медикал техникал промоушн гмбх», Германия

“mtp medical technical promotion gmbh”, Германия

адрес: take-off GewerbePark 46, D-78579 Neuhausen obEck, Germany

Тел.: +49(7467)9 45 04-0, +49(7467)9 45 04-99)

Назначение изделий - «Инструмент режущий» применяется в малоинвазивной хирургии, гинекологии, урологии, торакальной хирургии, детской хирургии и др.

Гарантийные обязательства производителя

Условия хранения и срок годности изделия указан на упаковке. Изделия в нарушенной индивидуальной упаковке не пригодны к использованию, и подлежат утилизации в установленном порядке.

Класс потенциального риска применения – 2а.

Материалы - для производства расходных материалов компания mtp medical technical promotion gmbh использует поливинилхлорид, поликарбонат, сталь нержавеющей.

Метод стерилизации - стерилизация этиленоксидом. Изделия являются одноразовыми и подлежат утилизации после однократного использования.

take-off GewerbePark 46, D-78579 Neuhausen obEck, Germany +49(7467)9 45 04-0, +49(7467)9 45 04-99


Описание изделий

Петли полипэктомические для электроэксцизии полипа или доброкачественной опухоли на ножке

011114-10



Монополярная режущая петля. Тип угловая, двухштырьковая, 24/26 Шр., Цветовой код: желтый. Для использования с рабочими элементами КАРЛ ШТОРЦ 27040 C/D/E. Используется при проведении резекции эндометрия и ткани предстательной железы при операциях ТУР, толщина среза ткани – 3-4мм. Стерильная, в упаковке 10 штук.

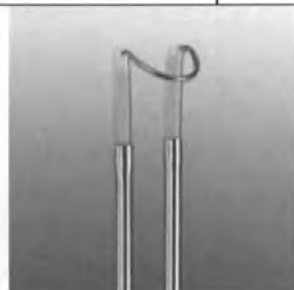

011115-10 - монополярный коагуляционный электрод. Тип игольчатый, двухштырьковый, 24/26 Шр., Цветовой код: желтый. Для использования с рабочими элементами КАРЛ ШТОРЦ 27040 C/D/E. Используются для вапоризации эндометрия и ткани предстательной железы при операциях ТУР. Стерильный, в упаковке 10 штук.



011116-10 - монополярный коагуляционный электрод. Тип шариковидный, Ø 3 мм, двухштырьковый, 24/26 Шр., Цветовой код: желтый. Для использования с рабочими элементами КАРЛ ШТОРЦ 27040 C/D/E. Используются для вапоризации эндометрия и ткани предстательной железы при операциях ТУР. Стерильный, в упаковке 10 штук.



011117-10 - монополярный коагуляционный электрод. Тип шариковидный, Ø 5 мм, двухштырьковый, 24/26 Шр., Цветовой код: желтый. Для использования с рабочими элементами КАРЛ ШТОРЦ 27040 C/D/E. Используются для вапоризации эндометрия и ткани предстательной железы при операциях ТУР. Стерильный, в упаковке 10 штук.



mtp medical technical promotion gmbh

Нож:

091112-05 - Ø 12 мм, рабочая длина 9,5 см, цветовой код: красный. Для использования с Rotocut G1 КАРЛ ШТОРЦ 26713001, 26713002, 26713003, 26713004, 26713005 и 26713006. Используются для уретротомии, толщина разреза 1-2мм. Стерильный, в упаковке 5 штук.

091115-05 - Ø 15 мм, рабочая длина 9,5см, цветовой код: черный. Для использования с Rotocut G1 КАРЛ ШТОРЦ 26713101, 26713102, 26713103, 26713002, 26713004 и 26713006. Используются для уретротомии, толщина разреза 1-2мм. Стерильный, в упаковке 5 штук.

091210-10 - нож по SACHSE. Тип прямой, двухштырьковый. Для использования с рабочим элементом КАРЛ ШТОРЦ 27040 E, а также оптикой 0° 27005 AA. Используются для уретротомии, толщина разреза 1-2мм. Стерильный, в упаковке 10 штук.

091211-10 - круглый, двухштырьковый нож. Для использования с рабочим элементом КАРЛ ШТОРЦ 27040 E, а также оптикой 0° 27005 AA. Используются для уретротомии, толщина разреза 1-2мм. Стерильный, в упаковке 10 штук.

091220-10 - нож по SACHSE. Тип прямой, одноштырьковый. Для использования с рабочим элементом КАРЛ ШТОРЦ 27050 E, а также оптикой 0° 27005 AA. Используются для уретротомии, толщина разреза 1-2мм. Стерильный, в упаковке 10 штук.

091221-10 - круглый, одноштырьковый нож. Для использования с рабочим элементом КАРЛ ШТОРЦ 27050 E, а также оптикой 0° 27005 AA. Используются для уретротомии, толщина разреза 1-2мм. Стерильный, в упаковке 10 штук.

Транспортировка и хранение - Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение изделия производится в условиях согласно рекомендациям производителя.

Упаковка - Изделия поставляются стерильными в индивидуальной упаковке, собранными по несколько штук в общую коробку.

take-off GewerbePark 46, D-78579 Neuhausen obEck, Germany +49(7467)9 45 04-0, +49(7467)9 45 04-99

ООО "Феу-Дагаз Компания"
Генеральный директор
Сырямин Д.В.

