



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»
Семёнов А.В.
«20» июля 2012 г.



Руководство по эксплуатации Тумбочка медицинская прикроватная Somero



ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

Оглавление

1. Введение;
2. Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие;
3. Описание и работа;
4. Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения);
5. Техническое обслуживание и текущий ремонт (порядок действий при возникновении неисправностей для изделий медицинской техники);
6. Условия хранения;
7. Условия транспортирования;
8. Порядок утилизации.

ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

1. Введение

Медицинские прикроватные тумбочки производства фирмы Joh. Stieglmeyer GmbH&Co. предназначены для ухода за пациентом и повышения комфорта в условиях медицинских стационаров. Общий дизайн тумбочек выдержан в стиле функциональных кроватей Stieglmeyer.

2. Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие

Определение лиц и групп:

Пользователь

Пользователи (врачи, средний медицинский персонал) должны ознакомиться с данной инструкцией.

Пациент

В данном Руководстве Пациентом названы недееспособные или нуждающиеся в уходе больные.

Данное Руководство содержит полную информацию для пользователей о правилах безопасности, которым необходимо неукоснительно следовать.

Правила безопасности пользователей:

- Применение данного Руководства, которое должно быть предоставлено вместе с тумбочкой, гарантирует, что каждый пользователь будет ознакомлен с правилами безопасной работы перед использованием прикроватной медицинской тумбочки.

- Каждый раз перед использованием тумбочки необходимо проверять ее полную работоспособность: движения колес, тормоз, ход выдвижных полок, движения откидного столика.

- Если подозреваются какие-либо неисправности нужно незамедлительно сообщить ответственному за оборудование человеку.


ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

3. Описание и работа

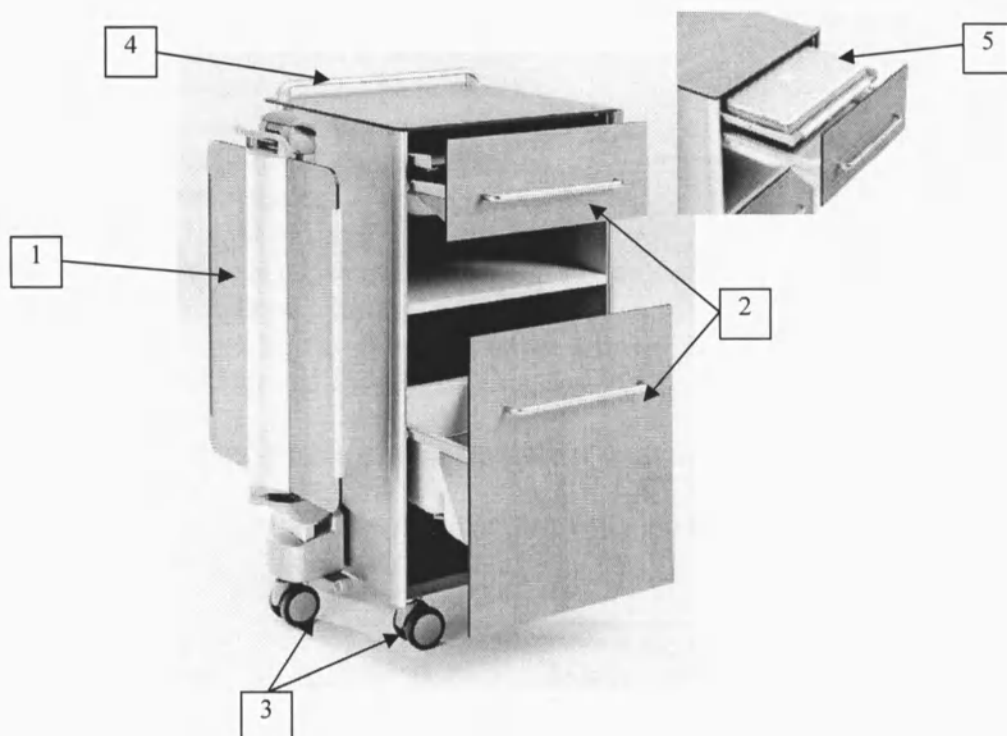

1	Откидной столик для приема пищи и чтения
2	Выдвижные ящики
3	Двойные колеса
4	Рейка по бортику на верхней поверхности
5	Подставка для ноутбука

Основные технические характеристики

Габариты: 555x444x873 мм (откидной столик опущен)
 Вес около 38 кг и около 46 кг с дополнительной опцией – холодильник
 Колеса двойные, диаметр 52 мм
 Габариты откидного столика: 370x550 мм
 Регулировка по высоте в диапазоне: 760-1110 мм

ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
 Россия, 197101, Санкт-Петербург
 Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
 тел.: +7 (812) 320 49 49
 факс: +7 (812) 320 49 40
 e-mail: main@bioline.ru
 www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
 Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
 Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
 Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
 Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
 Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
 Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85


ДП «БиоЛайн Украина»
 03062, Украина, Киев
 пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
 тел.: +38 (044) 200 89 37
 факс: +38 (044) 200 89 20
 e-mail: info@bioline.kiev.ua

Список принадлежностей

1. Большой выдвижной ящик с полкой для ноутбука (Large drawer with notebook shelf).
2. Большой ящик (Large drawer).
3. Столик обеденный, HPL-ламинат (Eating table HPL).
4. Столик обеденный, ABS-пластик (Eating table ABS).
5. Двойные колеса, диаметр 65мм (Double castors 65 mm).
6. Колеса с тормозами, 4 штуки (Braked castors, 4 pieces).
7. Держатель для бутылки (Bottle holder).
8. Держатель для полотенец (Towel holder).
9. Рейка по бортику на верхней поверхности (Gallery rail on top).
10. Держатель для телефона (Telephone adapter).
11. Замок для верхнего выдвижного ящика (Lock for upper drawer).
12. Встроенный холодильник (Integrated fridge).

4. Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения)

Столик для приема пищи и чтения пневматически регулируется по высоте и поворачивается.

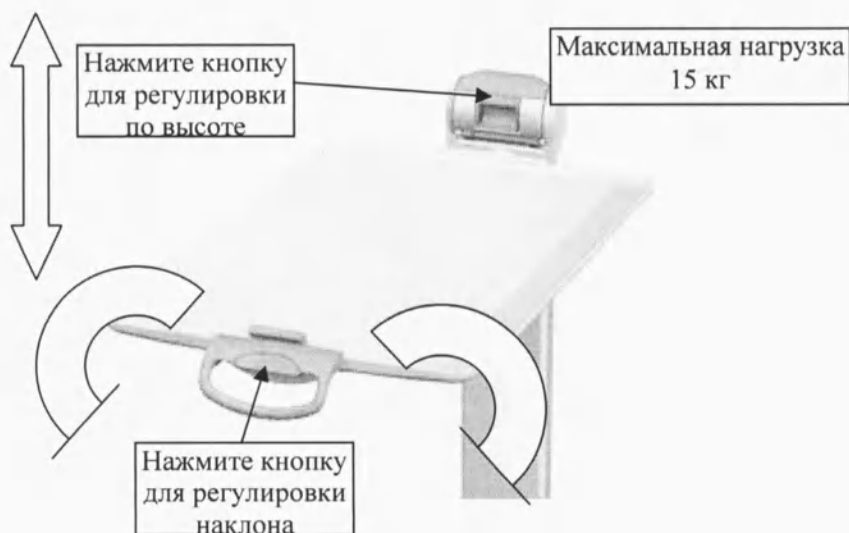


Нажмите рычаг, для того, чтобы откинуть столик

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru


Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

Держась за ручку столика, поднимите его вверх

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

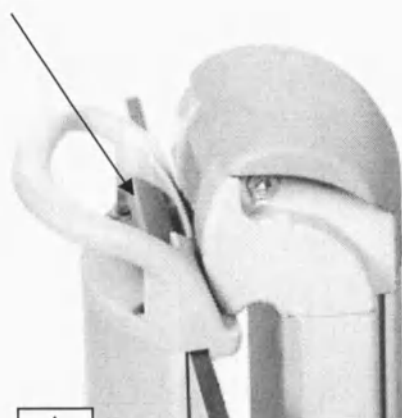

А

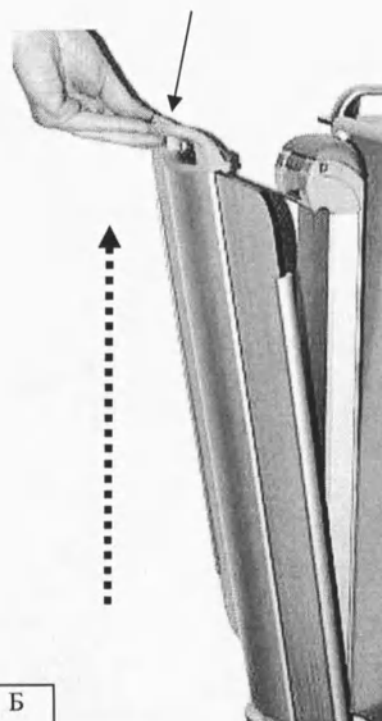

Б

Подняв столик на максимальную высоту, аккуратно наклоните его, чтоб придать горизонтальное положение



В



Г



Д


Откидной столик легко отсоединяется и присоединяется к другой стороне тумбочки.

ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

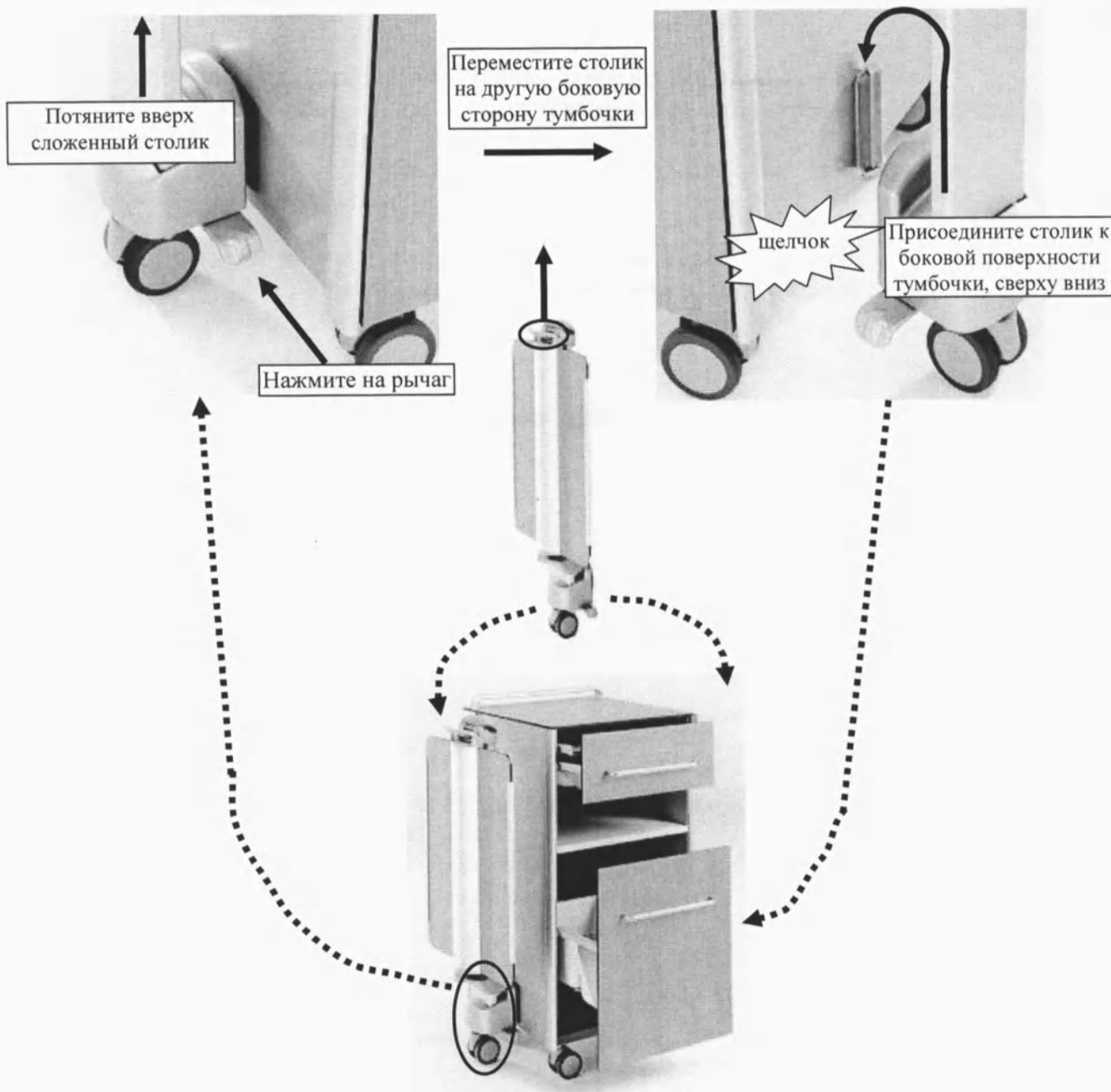

5. Техническое обслуживание и текущий ремонт (порядок действий при возникновении неисправностей для изделий медицинской техники)

ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

Тумбочка спроектирована и сконструирована для применения в течение длительного времени.

Многократные сборки и разборки, а также неправильное использование могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя.

В случае выявления повреждений или неисправностей тумбочка должна быть незамедлительно выведена из эксплуатации.

Для поддержания работы и для осуществления гарантийных обязательств должны использоваться только оригинальные изделия фирмы-изготовителя Joh. Stieglmeyer GmbH & Co.

6. Условия хранения

	Минимальная	Максимальная
Температура хранения	+5°C	+50°C
Относительная влажность	50%	70%

7. Условия транспортирования

Транспортироваться тумбочки могут только в упаковочном материале, который должен полностью защищать все компоненты тумбочки от механических и физических повреждений.

8. Порядок утилизации

В случае утилизации пластиковые и металлические части должны быть отделены друг от друга и утилизированы соответствующим образом.

Продажа и сервисное обслуживание:

ООО "БиоСистемы", 197101 г. Санкт-Петербург,

Петроградская набережная, дом 36, литер А, Бизнес-центр «Линкор»

тел.: (812)3204949, факс: (812)3204940

Бесплатный номер сервисной службы для всех регионов: 8 800 333 00 49

Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»

Семенов А.В.

«20» июля 2012 г.

ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 49
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

В настоящем документе прошито и
пронумеровано _____ листов
Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»

Семенов А.В.

