

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Орто.Ник»

Н.Б. Беззубов



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

ЭТИКЕТКА

(Инструкция по применению)

ПОВА.944738.000 ЭТ-01

СТЕЛКИ И ПОЛУСТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

по ТУ 9396-002-77799226-2015

Наименование

Стельки и полустельки ортопедические по ТУ 9396-002-77799226-2015.

Варианты исполнений

Наименование изделия	Арт и-кул	Обозначение конструкторского документа
1 Стельки ортопедические для модельной обуви "Ультра"	115	ПОВА.944738.002-001
2 Стельки ортопедические для модельной обуви "Бьюти"	SB10	ПОВА.944738.002-002
3 Стельки ортопедические для модельной обуви "Старс"	101	ПОВА.944738.002-003
4 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко-Грация"	19К	ПОВА.944738.002-004
5 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Мода"	111	ПОВА.944738.002-005
6 Стельки ортопедические "Эко Грация" полнопрофильные для обуви на высоком каблуке	SB03	ПОВА.944738.002-006
7 Стельки ортопедические	03P-2	ПОВА.944738.002-007
8 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко стиль"	78М	ПОВА.944738.002-008
9 Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	125	ПОВА.944738.002-009
10 Стельки ортопедические для модельной обуви "Бьюти"	SB11	ПОВА.944738.002-010
11 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко стиль"	SB04	ПОВА.944738.002-011
12 Стельки ортопедические для модельной обуви "Старс"	102	ПОВА.944738.002-012
13 Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	126	ПОВА.944738.002-013
14 Стельки ортопедические	SB24	ПОВА.944738.002-014
15 Стельки ортопедические	116	ПОВА.944738.002-015
16 Стельки ортопедические	114	ПОВА.944738.002-016
17 Стельки ортопедические	130	ПОВА.944738.002-017
18 Стельки ортопедические полнопрофильные "ЭВА"	25Е	ПОВА.944738.002-018
19 Стельки ортопедические каркасные	108	ПОВА.944738.002-019
20 Стельки ортопедические каркасные	103	ПОВА.944738.002-020
21 Стельки ортопедические лечебно-профилактические	113	ПОВА.944738.002-021
22 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB13	ПОВА.944738.002-022
23 Стельки ортопедические полнопрофильные	17	ПОВА.944738.002-023
24 Стельки ортопедические полнопрофильные "Лада"	83	ПОВА.944738.002-024
25 Стельки ортопедические полнопрофильные "Лада"	87	ПОВА.944738.002-025
26 Стельки ортопедические лечебно-профилактические. "Спорт"	30Е	ПОВА.944738.002-026
27 Стельки ортопедические каркасные	54	ПОВА.944738.002-027
28 Стельки ортопедические каркасные	106	ПОВА.944738.002-028
29 Стельки ортопедические лечебно-профилактические. "Зима"	31Е	ПОВА.944738.002-029
30 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB12	ПОВА.944738.002-030
31 Стельки ортопедические полнопрофильные	104	ПОВА.944738.002-031
32 Стельки ортопедические каркасные	45	ПОВА.944738.002-032
33 Стельки ортопедические "АНТИШПОРА"	93	ПОВА.944738.002-033
34 Стельки ортопедические	131	ПОВА.944738.002-034
35 Стельки ортопедические мягкие "Софт"	68	ПОВА.944738.002-035
36 Стельки лечебно-профилактические	142	ПОВА.944738.002-036
37 Стельки ортопедические с высокими бортиками	SB23	ПОВА.944738.002-037
38 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB21	ПОВА.944738.002-038
39 Стельки лечебно-профилактические	122	ПОВА.944738.002-039
40 Стельки лечебно-профилактические массажные	89	ПОВА.944738.002-040
41 Стельки ортопедические каркасные	SB08	ПОВА.944738.002-041
42 Стельки ортопедические	112	ПОВА.944738.002-042
43 Стельки мягкие ортопедические	SB09	ПОВА.944738.002-043
44 Стельки лечебно-профилактические	100	ПОВА.944738.002-044
45 Стельки ортопедические разгружающие. "Диабетические"	Д2-2	ПОВА.944738.002-045
46 Стельки ортопедические	SB19	ПОВА.944738.002-046

47 Стельки ортопедические мягкие	76	ПОВА.944738.002-047
48 Стельки лечебно-профилактические	139	ПОВА.944738.002-048
49 Стельки ортопедические лечебно-профилактические "Арми"	97	ПОВА.944738.002-049
50 Стельки ортопедические разгружающие "Элит" с эффектом памяти	ДЗ-2	ПОВА.944738.002-050
51 Стельки ортопедические "Индивидуальные"	53И	ПОВА.944738.002-051
52 Стельки ортопедические каркасные "ЭЛИТ"	29К	ПОВА.944738.002-052
53 Стельки ортопедические каркасные	90	ПОВА.944738.002-053
54 Стельки ортопедические с покрытием из натуральной шерсти "Элит зима"	50Т	ПОВА.944738.002-054
55 Стельки ортопедические с высокими бортиками	88	ПОВА.944738.002-055
56 Стельки ортопедические для уменьшения нагрузки на позвоночник	SB18	ПОВА.944738.002-056
57 Стельки лечебно-профилактические	141	ПОВА.944738.002-057
58 Стельки ортопедические с высокими бортиками "Бейс"	77	ПОВА.944738.002-058
59 Стельки ортопедические для уменьшения нагрузки на позвоночник	107	ПОВА.944738.002-059
60 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB22	ПОВА.944738.002-060
61 Стельки ортопедические мягкие "Комфорт"	38К	ПОВА.944738.002-061
62 Стельки ортопедические полнопрофильные	105	ПОВА.944738.002-062
63 Стельки ортопедические	SB25	ПОВА.944738.002-063
64 Стельки ортопедические, каркасные. "Оптимa"	10Р	ПОВА.944738.002-064
65 Стельки гелевые с биомагнитным воздействием.	85	ПОВА.944738.002-065
66 Стельки лечебно-профилактические	146	ПОВА.944738.002-066
67 Стельки ортопедические мягкие с покрытием из натуральной овечьей шерсти "зимний Комфорт"	38Т	ПОВА.944738.002-067
68 Стельки ортопедические с покрытием из натурального меха. "Зимний уют"	22Т	ПОВА.944738.002-068
69 Стельки ортопедические разгружающие "Микс"	110М	ПОВА.944738.002-069
70 Стельки лечебно-профилактические	96	ПОВА.944738.002-070
71 Стельки лечебно-профилактические	86	ПОВА.944738.002-071
72 Стельки ортопедические мягкие с покрытием из натуральной овечьей шерсти	74	ПОВА.944738.002-072
73 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко лайт"	SB02	ПОВА.944738.002-073
74 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB20	ПОВА.944738.002-074
75 Стельки ортопедические каркасные "VICTORY - HIGH"	99	ПОВА.944738.002-075
76 Стельки ортопедические лечебно-профилактические для водителей "Драйвер"	94	ПОВА.944738.002-076
77 Стельки ортопедические для разгрузки коленных суставов "Флекс"	57	ПОВА.944738.002-077
78 Стельки лечебно-профилактические	143	ПОВА.944738.002-078
79 Стельки лечебно-профилактические	147	ПОВА.944738.002-079
80 Стельки ортопедические с зонами разгрузки "Комби"	SB07	ПОВА.944738.002-080
81 Стельки лечебно-профилактические	81	ПОВА.944738.002-081
82 Стельки ортопедические каркасные "Актив"	55А	ПОВА.944738.002-082
83 Стельки лечебно-профилактические	127	ПОВА.944738.002-083
84 Стельки лечебно-профилактические	79	ПОВА.944738.002-084
85 Стельки ортопедические полнопрофильные "Бабочка"	95	ПОВА.944738.002-085
86 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко лайт"	82М	ПОВА.944738.002-086
87 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко"	59К	ПОВА.944738.002-087

88 Стельки лечебно-профилактические	144	ПОВА.944738.002-088
89 Стельки ортопедические "ЭКО-натура"	98	ПОВА.944738.002-089
90 Стельки ортопедические каркасные "Польза"	49К	ПОВА.944738.002-090
91 Стельки ортопедические каркасные с вентилируемым покрытием "Бриз"	67	ПОВА.944738.002-091
92 Стельки лечебно-профилактические	148	ПОВА.944738.002-092
93 Стельки ортопедические лечебно-профилактические для спортивной обуви "Терм"	109	ПОВА.944738.002-093
94 Стельки ортопедические силиконовые	84	ПОВА.944738.002-094
95 Стельки лечебно-профилактические	128	ПОВА.944738.002-095
96 Стельки ортопедические	92	ПОВА.944738.002-096
97 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко"	SB01	ПОВА.944738.002-097
98 Стельки ортопедические полнопрофильные	80Н	ПОВА.944738.002-098
99 Стельки ортопедические полнопрофильные "VICTORY"	23К	ПОВА.944738.002-099
100 Стельки ортопедические полнопрофильные "VICTORY - ANTISHOCK"	69	ПОВА.944738.002-100
101 Стельки ортопедические полнопрофильные	117	ПОВА.944738.002-101
102 Стельки лечебно-профилактические	145	ПОВА.944738.002-102
103 Стельки лечебно-профилактические	129	ПОВА.944738.002-103
104 Стельки лечебно-профилактические	149	ПОВА.944738.002-104
105 Полустельки ортопедические "Блейд"	121	ПОВА.944738.003-001
106 Стельки лечебно-профилактические прозрачные для модельной обуви	209С	ПОВА.944738.003-002
107 Полустельки ортопедические для использования в модельной обуви с высотой каблука до 7см.	66К	ПОВА.944738.003-003
108 Стельки ортопедические силиконовые $\frac{3}{4}$ "Ароматизированные"	75С	ПОВА.944738.003-004
109 Полустельки ортопедические "Модельные"	27М	ПОВА.944738.003-005
110 Полустельки ортопедические	71В	ПОВА.944738.003-006
111 Полустельки лечебно- профилактические с изменяемой шириной пятки "Вариант"	119	ПОВА.944738.003-007
112 Полустельки ортопедические	SB26	ПОВА.944738.003-008
113 Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	217С	ПОВА.944738.003-009
114 Полустельки ортопедические "Модельные лайт"	60К	ПОВА.944738.003-010
115 Полустельки ортопедические каркасные "Оптимa лайт"	64К	ПОВА.944738.003-011
116 Полустельки ортопедические каркасные "Оптимa"	09Р	ПОВА.944738.003-012
117 Полустельки ортопедические для модельной обуви "Подиум"	73К	ПОВА.944738.003-013
118 Полустельки ортопедические силиконовые	120	ПОВА.944738.003-014
119 Стельки ортопедические $\frac{3}{4}$	124	ПОВА.944738.003-015
120 Полустельки мягкие ортопедические "Комфорт лайт"	72К	ПОВА.944738.003-016
121 Стельки ортопедические $\frac{3}{4}$	91	ПОВА.944738.003-017
122 Полустельки ортопедические "Стиль"	118	ПОВА.944738.003-018
123 Стельки лечебно-профилактические детские	136	ПОВА.944738.004-001
124 Стельки ортопедические каркасные детские	152	ПОВА.944738.004-002
125 Стельки лечебно-профилактические детские	133	ПОВА.944738.004-003
126 Стельки ортопедические корректирующие детские "Косолапки"	24К	ПОВА.944738.0044004
127 Стельки ортопедические детские	137	ПОВА.944738.004-005
128 Стельки ортопедические каркасные детские "Оптимa"	11Р	ПОВА.944738.004-006
129 Стельки ортопедические детские	140	ПОВА.944738.004-007
130 Стельки ортопедические каркасные детские	134	ПОВА.944738.004-008
131 Стельки ортопедические детские	154	ПОВА.944738.004-009
132 Стельки ортопедические каркасные детские	153	ПОВА.944738.004-010

133 Стельки ортопедические детские "Топ-Топ"	32К	ПОВА.944738.004-011
134 Стельки ортопедические детские	150	ПОВА.944738.004-012
135 Стельки ортопедические детские	151	ПОВА.944738.004-013
136 Стельки ортопедические детские	138	ПОВА.944738.004-014
137 Стельки ортопедические детские с покрытием из натуральной шерсти "Зима"	51Т	ПОВА.944738.004-015
138 Стельки ортопедические каркасные детские	SB17	ПОВА.944738.004-016
139 Стельки ортопедические каркасные детские	SB16	ПОВА.944738.004-017
140 Стельки ортопедические корректирующие детские "Эффект плюс"	58П	ПОВА.944738.004-018
141 Стельки ортопедические каркасные детские	132	ПОВА.944738.004-019
142 Стельки ортопедические детские корректирующие "Бейби"	SB05	ПОВА.944738.004-020
143 Стельки лечебно-профилактические детские	123	ПОВА.944738.004-021
144 Стельки лечебно-профилактические детские "Спорт"	20Е	ПОВА.944738.004-022
145 Стельки ортопедические детские корректирующие "Эффект"	26Е	ПОВА.944738.004-023
146 Стельки ортопедические детские корректирующие "Бейби"	65А	ПОВА.944738.004-024
147 Стельки ортопедические корректирующие детские "Забота"	18К	ПОВА.944738.004-025
148 Стельки ортопедические детские	SB15	ПОВА.944738.004-026
149 Стельки ортопедические детские "Медиум"	56Е	ПОВА.944738.004-027
150 Стельки ортопедические детские	SB14	ПОВА.944738.004-028
151 Полустельки ортопедические детские	135	ПОВА.944738.005-001
152 Полустельки ортопедические детские	155	ПОВА.944738.005-002
153 Полустельки ортопедические детские	156	ПОВА.944738.005-003
154 Полустельки ортопедические детские	SB27	ПОВА.944738.005-004

Эксплуатационный документ распространяется на следующие артикулы:

03Р-2	60К	101
09Р	64К	102
10Р	66К	103
11Р	67	105
19К	68	106
20Е	69	108
23К	72К	111
27М	73К	112
29К	74	114
30Е	76	115
31Е	78М	116
32К	80Н	117
38К	82	119
38Т	89	121
45	90	122
50Т	92	123
51Т	94	125
53И	96	126
54	97	130
55А	98	131
56Е	99	133
59К	100	134

135	156	SB11
137	SB01	SB16
151	SB02	SB17
152	SB03	SB26
153	SB04	SB27
154	SB08	
155	SB10	

Назначение

Стельки и полустельки предназначены для лечения и профилактики заболеваний стопы, а также для создания комфортных условий пользователям, которые имеют различного рода деформацию стопы.

Стельки и полустельки предназначены для индивидуального использования.

Технические характеристики

При изготовлении стелек и полустелек должны быть использованы материалы, указанные в таблице

Название материала и красителей	Фирма-изготовитель, страна или нормативный документ
Кожа компрессионная регенерированная (кожаная стружка, латекс), арт. Special NSS	Алькор, Италия
Искусственная кожа Поливинилхлорид (ПВХ пленка). Артикул Lai-porellina	Sisa, Италия
Подкладочный материал Microliner полиэстер/полиамид	Huzhou Forince Textile CO.LTD, Китай
Подкладочный материал ST1304 NP silbe полиамид	Twe group Германия
Драйсол стелечный материал Вискоза/Полиамид/Полиэстр	Twe group Германия
Подкладочный материал арт. SC 1350N 044 (bedun) 60% Latex, 40% Polyester	Quanzhou Hengdali Import and export Китай
Материал Неоперн 100% бутадиен-стирольный каучук	Chuan Hui int, Китай
Подкладочный материал Line Kappa100% вспененный ПВХ	Twe group Германия
Материал Спайдер12%вискозы88%бутадиенстирольный каучук	Zahonero, Испания
Ортофом «Primacell» Вспененный пенополиэтилен 100%	Голион, Франция
Материал Мемори Фоам вспененный латекс, полиэстер	Emsold, Германия
Лента 8160 PET 12 акриловый клей на полиэфирном носителе	Свифт Кемикал, Италия
Материал Параскин полиэтилентерефталат/полипроппен/	Twe group, Германия
Материал Ноу слип DOP - 20% PVC- 30% CaCo3 - 30%	Changie Ypuan Textile, Китай
Термопласт смесь из тенополимера на основе полиэстера/полиуретан. Артикулы : Biorel 08, Relion 015, Relion 020	Technogy, Италия
Резинка для брителей полиэстер/ латекс	Веллеткс, Китай
Микропласт PA-MICROPLAST 25443-00 100% полиамид.	Мираль, Германия
Силикон Ecoflex 030, Silimold АКР 08 (силикон медицинский)	Алькор, Италия
Скотч двухсторонний ПВХ Поливинилхлорид	Foshan City Nanhai Zemu Xiang Adhesive Pcts., Ltd. Китай
Интерлок трикотажное х/б полотно	Ресстекс, Турция
Микрофибра Vermont and Versales Crudo (нейлон 60 %, полиуретан 40%)	Tejidos Roca, Испания
Материал НО грип (бутадиен- стирильного каучука с вискозной тканью - 100%)	Zahonero, Испания
Материал Пенка (пенополиуретан)	Aureright, Китай
Материал Borreguillo(20% полиэстер,80% бутадиен-стирольный каучук)	Zahonero, Испания

Вкладные элементы(амортизаторы, валики): вспененный латекс. Carbosan	Emsold, Германия
Материал Sharc 1 (полиамид-91%, полиэстер-4%, серебряная нить - 5%)	Vegam, Италия
KEVLAR 80 LOGO Поливинилхлорид (ПВХ пленка)	Coronet SPA, Италия
Ламинированный текстильный материал 50% силикона, 50% хлопка, арт. HSTA5050E-2828-480	Hong Yang Textile, Китай
Намагнитенная резина «постоянный магнит» (винил, ферритный порошок Sr 0.6 Fe 203)	AIC Magnetics Ltd., Китай
Эластичная лента 70%полезфир 30%латекс	ОСТ Р 17-10-883-93, ООО Производственная компания Ультратекс
Креатекс шерсть 80% овечий пух/ 20%ПЭ	ТУ 8390-001-57904514-2013, ОАО Фанема
Спилок-велюр вид натурального кожевенного материала	ТУ 17-06-95-84 . ОАО Русская Кожа.Рязань
Полотно полиэфирное, Артикул 200	ТУ 8397-016-22739674-2014, ОАО Предприятие Нетканых Материалов
Иглопробивной материал полиэфирное полотно, Артикул С3/3Л	ТУ 8397-030-00300297-2007, ОАО Термопласт
Нитки лавсановые 45ЛЛ армированные с полиэфирной оплёткой	ГОСТ 6309-93, ОАО «ПНК ИМ КИРОВА»
Лист пенополителена ППЭ 1П	ТУ 2246-01-10489953-98, ООО ЭТИОЛ
Кожи (крупнорогатого скота) Артикул КРС (0,9-1,1мм)	ГОСТ 940-81, ГОСТ 1838-91, ОАО Вахруши ЮФть
Пенополиэтилен ППЭ-2М, ППЭ-3М	ТУ 2246-001-10489953-98, ООО Этиол
Изолон ПСЭВ	ТУ 2244-013-00203476 ОАО Ижевский завод пластмасс
Пеносевилен СЭВ-1, СЭВ-2, СЭВ-3	ТУ 55 221 1350 ,ООО Этиол
Пласты коры пробкового дуба, плиты прессованные из пробковой крошки.Артикул 1/75	Vega Industries, Испания
Пластмасса ПЭТ (полиэтилен) Артикул Пластик А-ПЭТ Novattro 2x1250x2050 мм прозрачный, Пластик А-ПЭТ Novattro 0,5x1250x2050 мм прозрачный	ТУ 2246-010-81057157-2014 ООО "СафПласт"
Лента велкро полиамид	ТУ 17-15-14-90. ОАО Лента. Беларусь
ЭВА (пластины пористые эвапласт этиленвинилацетат)	СТО 8741-016-00300209-2014 ОАО Искож и ООО Экопром
Искусственный нубук (полиэстер), Артикул эксперт 1.2	Lifli Rulo ve Levha San,Турция
Полиуретановый гель (8118M48-A; 220M19-B)	Jinsheng Industrial Co.,Ltd. Китай
Каркасы из полипропилена 30 марки	ТУ 2211-001-76332549 ООО Сурсил
Краситель Solvent Blue 104 (синий), Solvent Red 135 (красный), Solvent Yellow 114 (жёлтый)	Huzhou Forince Textile CO.LTD,Китай
Краситель Luconyl	Zahonero, Испания
Концентрат "БАСКО"6 (Перламутровый)	ООО «Этиол», г. Владимир
Краситель П 514	ОАО «Искож», г. Киров
Краситель GHS Beige nylon GN08 (бежевый)	Chuan Hui int, Китай
Краситель Silc PIG (0.11) (зелёный)	Jinsheng Industrial Co.,Ltd. Китай

Основные характеристики стелек и полустелек см. Приложение А

Жесткие детали из термопластичных и влагоотверждаемых материалов должны изготавливаться в сочетании со смягчающе-разгружающим слоем толщиной не более 5 мм.

Стельки и полустельки должны состоять из следующих деталей: верхнего покрытия, нижнего покрытия (при необходимости) и межстелечного слоя.

Межстелечный слой должен изготавливаться цельноформованным (однослойным) или наборным (многослойным).

Межстелечный слой может быть выполнен в виде выкладки внутреннего продольного свода, выкладки внутреннего и наружного продольного сводов, выкладки поперечного свода.

Наружные края стелек и полустелек должны быть обработаны в обрезку и должны иметь чистый без выхватов срез.

В наружных края стелек и полустелек с использованием термопластичных материалов допускается обработка жестких деталей в обрезку.

Склеенные между собой детали стелек и полустелек должны плотно прилегать друг к другу без видимого зазора.

Стельки и полустельки должны быть без морщин, пятен, загрязнений, следов клея, механических повреждений, местных отслоений деталей.

Стельки и полустельки должны быть устойчивы к санитарной обработке, состоящей из протирания теплым мыльным раствором с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С, протирания водой с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С и сушки.

Стельки и полустельки должны быть устойчивы к агрессивным биологическим жидкостям (пот).

Стельки гелевые с биомагнитным воздействием должны иметь на верхней поверхности стельки величину магнитной индукции (40 ± 15) мТл.

Стельки и полустельки должны быть сохранять свои свойства в рабочих климатических условиях, которые соответствуют УЗ.1, УХЛЗ.1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 20 до плюс 40°С.

Стельки и полустельки, упакованные в транспортную тару, должны быть устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании и соответствующим указанным в ГОСТ Р 50444 для условий транспортирования.

Средний срок службы стелек и полустелек до списания должен быть не менее 6 месяцев. Средний срок хранения стелек (артикулов 84,209С, 75С, 217С, 120) при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей должен быть не менее 24 месяцев, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 48 месяцев

По возможным последствиям отказа в процессе эксплуатации стельки и полустельки относятся к классу Г по РД 50-707.

По потенциальному риску применения стельки и полустельки относятся к классу 1.

Номенклатурное обозначение стелек и полустелек – 250260, 320560

Внешний вид базовых образцов






Стельки ортопедические полнопрофильные «ЭКО», артикул 59K



Полустельки ортопедические каркасные "Оптима", артикул 09P

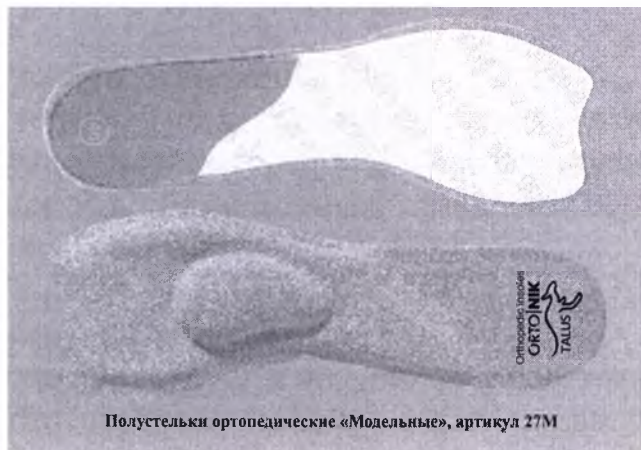

Полустельки ортопедические «Модельные», артикул 27M



Стельки ортопедические каркасные детские «Оптима», артикул 11P



Стельки лечебно-профилактические детские «Спорт», артикул 20E



Полустельки мягкие ортопедические «Комфорт лайт», артикул 72K



Полустельки ортопедические детские, артикул 135

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Показания к применению – см. приложение А

Противопоказания – переломы стоп, открытые раны на подошвенной поверхности стоп, индивидуальная непереносимость, необходимо проконсультироваться с врачом.

Возможные побочные действия – нет.

Транспортирование и хранение

Стельки и полустельки могут перевозиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением требований, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования стелек и полустелек должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Хранение стелек и полустелек у изготовителя должно осуществляться в транспортной упаковке с соблюдением условий хранения при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей.

Указания по эксплуатации

При эксплуатации стелек и полустелек должны соблюдаться указания, помещенные в этикетке.

Указания по утилизации

Материалы, из которых изготовлены стельки и полустельки, являются безопасными для человека и окружающей среды.

Стельки и полустельки после их использования могут быть утилизированы как бытовой мусор класса опасности А.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие стелек и полустелек требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок использования стелек и полустелек (артикулов 84 209С, 75С, 217С, 120) – 2 месяца, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 6 месяцев.

Срок гарантии устанавливается со времени выдачи стелек и полустелек или их продажи согласно копии товарного чека.

В течение гарантийного срока в случае выявления производственного дефекта и (или) несоответствия медицинским показаниям предприятие-изготовитель производит ремонт или изготовление стелек и полустелек бесплатно. Гарантийный срок хранения стелек и полустелек (артикулов 84 209С, 75С, 217С, 120) – 12 месяцев со дня изготовления, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 36 месяцев

Дата изготовления указана на упаковке.

Количество- штук.

Артикул: №.....

ТУ 9396-002-77799226-2015

Изготовитель:

ООО «Орто.Ник»

Адрес места нахождения: 194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д.3, литер Л, помещение 1-Н, комната 125;

е-mail: stelki@mail.ru; ИНН 7810043090

тел. (812) 677-46-47

Претензии потребителей принимаются Изготовителем.

Приёмка

Стельки и полустельки приняты ОТК фирмы ООО
и соответствуют требованиям ТУ 9396-002-77799226-2015

Подпись

Штамп ОТК

Инв. № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические "Эко Грация" полнопрофильные для обуви на высоком каблуке	SB03	Стельки взрослые	Предназначены для повседневной и модельной обуви с высотой каблука до 10 см. Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		2	3	23	106
Стельки ортопедические	03P-2	Стельки взрослые	Профилактика и лечение продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия и вальгусной и плоско-вальгусной		2,5	2,5	7	46
Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко стиль"	78M	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Снимают усталость и боли в ногах, эффективно разгружают передний отдел стопы.		2,5	3	22	98
Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	125	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики поперечного плоскостопия, создание комфорта при ходьбе в модельной обуви с высоким каблуком. Препятствуют скольжению стопы вперед в обуви.		1,5	1,5	22	55
Стельки ортопедические для модельной обуви "Бьюти"	SB11	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		1,5	1,5	22	96

Продолжение приложения А

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические каркасные	108	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	7	25	80
Стельки ортопедические каркасные	103	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2,5	8,5	22	60
Стельки ортопедические лечебно-профилактические	113	Стельки взрослые	Рекомендуются для снижения нагрузки на стопу и создания комфорта при ходьбе.		3	4	21	64
Стельки ортопедические полнопрофильные	SB13	Стельки взрослые	Рекомендуется для коррекции продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		1,5	4	27	70

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические полнопрофильные	17	Стельки взрослые	Рекомендуется для коррекции продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		1,5	6	27	70
Стельки ортопедические полнопрофильные "Лада"	83	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		2	2	32	98
Стельки ортопедические полнопрофильные "Лада"	87	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		2	2	32	98
Стельки ортопедические лечебно-профилактические. "Спорт"	30Е	Стельки взрослые	Рекомендуются для спортивной и повседневной обуви. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	4	25	64
Стельки ортопедические каркасные	54	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	7	25	79

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Инв. № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические каркасные	45	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	7	25	75
Стельки ортопедические "АНТИШПОРА"	93	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики пяточных шпор, болезни Шинца, болей в пятке различного происхождения.		2,5	5	25	75
Стельки ортопедические	131	Стельки взрослые	Рекомендуются для профилактики и лечения продольного и поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе. Предназначены для зимней и демисезонной обуви.		2,5	8	22	66
Стельки ортопедические мягкие "Софт"	68	Стельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном). Могут использоваться в модельной, спортивной и повседневной обуви		3	5,5	9	56
Стельки лечебно-профилактические	142	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на стопу.		3	6	19	61

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические с высокими бортиками	SB23	Стельки взрослые	Рекомендуется использовать для реабилитации после всех типов переломов лодыжек и костей стопы; после травм и операций в области стопы и голеностопного сустава; при деформациях и нестабильность голеностопного сустава, нарушении тонуса мышц стопы и голени коррекция нефиксированных деформаций стоп, в том числе у подростков. Также могут использоваться в специальной обуви (коньки, ролики и т.п.), в ортопедической обуви для		4	3	41	114
Стельки ортопедические полнопрофильные	SB21	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		2	2	32	98
Стельки лечебно-профилактические	122	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		2	4	22	70
Стельки лечебно-профилактические массажные	89	Стельки взрослые	Бережно поддерживают своды стопы; уменьшают нагрузку на суставы; оказывают массажное воздействие на стопу, улучшая кровообращение, препятствуя образованию мозолей.		2	4,5	4,5	66

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Подл. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические разгружающие. "Диабетические"	Д2-2	Стельки взрослые	Рекомендуются при "диабетической стопы", деформациях стопы при ревматоидном полиартрите, подагре и других заболеваниях, сопровождающихся выраженными и фиксированными деформациями стопы, а также при нейро- и ангиопатии различной этиологии.		3	4	20	64
Стельки ортопедические	SB19	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики пяточных шпор, болезни Шинца, болей в пятке различного происхождения.		3	5	25	68
Стельки ортопедические мягкие	76	Стельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном). Могут использоваться в модельной,		3	6	11	58
Стельки лечебно-профилактические	139	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на		3	6	19	55
Стельки ортопедические лечебно-профилактические "Арми"	97	Стельки взрослые	Рекомендуются для военной, спортивной и повседневной обуви. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		4	5	17	82

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Л	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические каркасные	90	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную наг-рузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		2,5	7	27	90
Стельки ортопедические с покрытием из натуральной шерсти "элит зима"	50Т	Стельки взрослые	Рекомендуются для профилактики и лечения продольного и поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе. Предназначены для зимней и демисезонной обуви.		2,5	8	22	64
Стельки ортопедические с высокими бортиками	88	Стельки взрослые	Рекомендуется использовать для реабилитации после всех типов переломов лодыжек и костей стопы; после травм и операций в области стопы и голеностопного сустава; при деформациях и нестабильность голеностопного сустава, нарушении тонуса мышц стопы и голени коррекция нефиксированных деформаций стоп, в том числе у подростков. Также могут использоваться в специальной обуви (коньки, ролики и т.п.), в ортопедической обуви для		3	3	41	101
Стельки ортопедические для уменьшения нагрузки на позвоночник	SB18	Стельки взрослые	Рекомендуются при повышенных нагрузках на опорно-двигательный аппарат.		3	4	20	82

Продолжение приложения А

ООО ЦИРМИ


INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Изм. № докум.	Подп. и дата	Изм. № докум.	Подп. и дата	Изм. № докум.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические полнопрофильные	105	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Эффективно снимают боли в ногах, разгружают передний отдел стопы.		2,5	2,5	25	120
Стельки ортопедические	SB25	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную наг-рузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		2,5	6	23	96
Стельки ортопедические, каркасные. "Оптима"	10Р	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной		2,5	8,5	22	60
Стельки гелевые с иомаг-нитным воздействием.	85	Стельки взрослые	Длительное пребывание на ногах, боли в мышцах ног и спины, венозная недостаточность и варикозное расширение вен нижних конечностей.		3	3	3	105
Стельки лечебно-профилактические	146	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		3	5	18	65
Стельки ортопедические мягкие с покрытием из натуральной овечьей шерсти "зимний Комфорт"	38Т	Стельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном).		3,5	4	11	60

Продолжение приложения А

Изм. № по...	Полн. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические с покрытием из натурального меха. "Зимний уют"	22Т	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного и поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе.		3,5	9	28	104
Стельки ортопедические разгружающие "Микс"	110М	Стельки взрослые	Продольное и/или поперечное плоскостопие 1-ой и 2-ой степени, комбинированное плоскостопие. Деформирующий артроз суставов стоп, голеностопного, коленного, тазобедренного суставов. Профилактика уплощения сводов стопы при выполнении тяжелого физического труда. Остеохондроз, остеоартроз, остеохондропатия. Профилактика утомляемости стоп при интенсивных занятиях спортом, гимнастикой, хореографией. Наличие		4	4	24	82
Стельки лечебно-профилактические	96	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	5	17	82
Стельки лечебно-профилактические	86	Стельки взрослые	Бережно поддерживают своды стопы; уменьшают нагрузку на суставы; разгружают передний отдел стопы; оказывают точечное воздействие на стопу, улучшая кровообращение.		4	7	4	56
Стельки ортопедические мягкие с покрытием из натуральной овечьей шерсти	74	Стельки взрослые	Рекомендуется как профилактические стельки, а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном или комбинированном). Стельки можно использовать в обуви с высотой		5	5	17	68

Продолжение приложения А

Изм. № полн.	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко лайт"	SB02	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Снимают боли в ногах, эффективно разгружают передний отдел стопы.		2	3	25	104
Стельки ортопедические полнопрофильные	SB20	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения поперечного и комбинированного плоскостопия, деформирующего артроза суставов пальцев стопы. Эффективно снимают боли в ногах, разгружают передний отдел стопы.		2,5	2,5	25	114
Стельки ортопедические каркасные "VICTORY - HIGH "	99	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2,5	8	22	60
Стельки ортопедические лечебно-профилактические для водителей "Драйвер"	94	Стельки взрослые	Снижают утомляемость ног при вождении автомобиля.		3	3	17	102
Стельки ортопедические для разгрузки коленных суставов "Флекс"	57	Стельки взрослые	Рекомендуются для разгрузки коленных суставов, а также для коррекции варусной установки стоп.		3	3	24	118
Стельки лечебно-профилактические	143	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на стопы		3	6	19	64

Продолжение приложения А

Изм. № докум.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические	147	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		3,5	5	15	68
Стельки ортопедические с зонами разгрузки "Комби"	SB07	Стельки взрослые	Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		4	5	25	72
Стельки лечебно-профилактические	81	Стельки взрослые	Бережно поддерживают своды стопы; уменьшают нагрузку на суставы; разгружают передний отдел стопы; оказывают точечное воздействие на стопу, улучшая кровообращение.		4	7	4	58
Стельки ортопедические каркасные "Актив"	55А	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Применяются в спортивной, повседневной и летней обуви, а также при повышенной потливости		4	8	24	72
Стельки лечебно-профилактические	127	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	10	18	76
Стельки лечебно-профилактические	79	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе.		4,5	4,5	4,5	55
Стельки ортопедические полнопрофильные "Бабочка"	95	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения поперечного и комбинированного плоскостопия, деформирующего артроза суставов пальцев стопы. Эффективно снимают боли в ногах, разгружают передний отдел стопы.		2	2,5	25	116

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Копия	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические	148	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	6	18	71
Стельки ортопедические лечебно-профилактические для спортивной обуви "Терм"	109	Стельки взрослые	Снимает усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник. Обладают антибактериальным эффектом		4	7	22	58
Стельки ортопедические силиконовые	84	Стельки взрослые	Поперечное плоскостопие I-II степени, продольное плоскостопие I-II степени, комбинированное плоскостопие, пяточная шпора, натоптыши под головками плюсневых костей и на кончиках пальцев стопы, вальгусная деформация стоп. Боли в подошвенной части стопы, связанные с артрозом суставов стоп, плоскостопием, пяточной шпорой и трофическими расстройствами. Эндартериит и атеросклероз суставов нижних конечностей.		4	7	22	140
Стельки лечебно-профилактические	128	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	10	18	80
Стельки ортопедические	92	Стельки взрослые	Профилактика и лечение продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Применяется при варикозной болезни, болях и отеках ног; интенсивной нагрузки на ноги и длительного ношения обуви; повышенное потоотделение ног,		4	10	28	82

Продолжение приложения А

Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические	145	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на		3	6	19	70
Стельки лечебно-профилактические	129	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	10	26	85
Стельки лечебно-профилактические	149	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4,5	6,5	18	74

Примечания

- 1 Все взрослые стельки выпускаются в размерном ряде с 34 по 48 размеры.
- 2 Все взрослые стельки градируются, начиная от базового размера.
- 3 Базовым размером для всех взрослых стелек и полустелек служит 39 размер.
- 4 Длина базового размера для взрослых стелек составляет 253 мм $\pm$ 3 %.
- 5 При градации длины размерного ряда взрослых стелек используется значение приращения из диапазона 7,5 мм $\pm$ 35 %. В зависимости от назначения изделия, возможно не равномерное приращение размерного ряда внутри артикула, в соответствии с указанным диапазоном приращений.
- 6 Полнота базового размера взрослых стелек определяется по ГОСТ 3927, в соответствии с 8 половозрастной группой.
- 7 Полнота размеров с 34 по 40 определяется по 8 половозрастной группе; с 41 по 48 определяется по 9 половозрастной группе в соответствии с ГОСТ 3927.
- 8 Толщина в переднем отделе взрослых стелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от переднего контура стельки на расстояние 10 мм.
- 9 Значение толщины в переднем отделе стелек определяется с допуском $\pm$ 0,5 мм.
- 10 Толщина в пяточном отделе взрослых стелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от заднего контура стельки на расстояние 30 мм.
- 11 Значение толщины в пяточном отделе стелек определяется с допуском $\pm$ 0,5 мм.
- 12 Высота внутреннего бортика определяется путем измерения расстояния от максимально высокой точки бортика до плоскости опоры (поверхности, на которой расположена стелька). Метод измерения ведется без приложения дополнительных нагрузок на внутренний бортик или изделие целиком.
- 13 Значение высоты внутреннего бортика стелек определяется с допуском $\pm$ 2 мм.
- 14 Значение массы взрослых стелек определяется с допуском $\pm$ 10 г.

Продолжение приложения А

000 ЦИРМИ	Л
-----------	---

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Полустельки ортопедические "Блейд"	121	Полустельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степени. Снимают усталость и боли в ногах, повышают комфортность обуви.		1	1	24	48
Стельки лечебно-профилактические прозрачные для модельной обуви	209С	Полустельки взрослые	Рекомендуются при болезненных ощущениях и повышенной утомляемости при ходьбе на высоких каблуках		1,5	3,5	3,5	38
Полустельки ортопедические для использования в модельной обуви с высотой каблука до 7см.	66К	Полустельки взрослые	Эффективно защищает ноги от усталости, снимает статические боли в переднем отделе стопы, предотвращают рост "косточек", развитие "Hallux valgus". Применяются также для профилактики и лечения		2	2	2	34
Стельки ортопедические силиконовые 3/4 "Ароматизированные"	75С	Полустельки взрослые	Снижают ударные нагрузки при ходьбе, повышает комфортность обуви, разгружают головки плюсневых костей, мягко поддерживает поперечный свод		2	2	2	58
Полустельки ортопедические "Модельные"	27М	Полустельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики поперечного плоскостопия, создание комфорта при ходьбе в обуви с высоким каблуком. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на передний отдел стопы.		2,5	1	1	28

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 2А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Полустельки ортопедические	71В	Полустельки взрослые	Для создания комфорта и снятия боли в обуви со средним и высоким каблуком.		3	3	3	26
Полустельки лечебно-профилактические с изменяемой шириной пятки "Вариант"	119	Полустельки взрослые	Рекомендуется для профилактики поперечного плоскостопия, создание комфорта при ходьбе в модельной обуви. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на передний отдел стопы.		3,5	0	2	27
Полустельки ортопедические	SB26	Полустельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степени. Снимают усталость и боли в ногах, повышают комфортность обуви.		1	1	24	48
Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	217С	Полустельки взрослые	При болезненных ощущениях и повышенной утомляемости при ходьбе в модельной обуви и обуви на высоких каблуках. Создают комфорт при ходьбе, разгружают пятку и передний отдел стопы, препятствует образованию натоптышей и наминов.		1,5	3,5	3,5	38
Полустельки ортопедические "Модельные лайт"	60К	Полустельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики поперечного плоскостопия, создание комфорта при ходьбе в обуви с высоким каблуком. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на передний отдел стопы.		1,5	1,5	1,5	37

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 2А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Полустельки ортопедические каркасные "Оптимa лайт"	64К	Полустельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степени. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на пятки, суставы нижних конечностей и позвоночник.		1,5	6,5	23	42
Полустельки ортопедические каркасные "Оптимa"	09Р	Полустельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		1,5	7,5	24	54
Полустельки ортопедические для модельной обуви "Подיום"	73К	Полустельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки, а также при поперечном плоскостопии и других проблемах переднего отдела стопы. Уменьшает нагрузку на передний отдел стопы, предотвращают образование "натоптышей" и мозолей, рост "косточек", развитие Hallux valgus. Снимает статические боли в переднем отделе стопы.		2,5	2,5	2,5	33

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Годов. н	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Продолжение таблицы 2А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Полустельки ортопедические силиконовые	120	Полустельки взрослые	Поперечное плоскостопие I-II степени, продольное плоскостопие I-II степени, комбинированное плоскостопие, период реабилитации после травм и операций на нижних конечностях и позвоночнике. Ревматоидный артрит с поражением суставов стопы. Обострения неврологических проявлений остеохондроза (острый радикулит), мозоли, трещины и сухость кожи пяточной части стопы. Деятельность, связанная с повышенной нагрузкой		3	5	18	84
Стельки ортопедические 3/4	124	Полустельки взрослые	Рекомендуются для повседневной обуви. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		3	9	22	70
Полустельки мягкие ортопедические "Комфорт лайт"	72К	Полустельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта и снятия боли. Могут использоваться в открытой и модельной обуви.		2	2,5	8	44
Стельки ортопедические 3/4	91	Полустельки взрослые	Рекомендуются для повседневной обуви. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		3	9	22	70

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 2А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Полустельки ортопедические "Стиль"	118	Полустельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном,		2	4	25	51

Примечания

- 1 Все взрослые полустельки выпускаются в размерном ряде с 34 по 48 размеры.
- 2 Все взрослые полустельки градируются, начиная от базового размера.
- 3 Базовым размером для всех взрослых полустелек служит 39 размер.
- 4 Длина базового размера для взрослых полустелек составляет 177 мм ± 3 %. Исключения составляют артикулы 60К, 119, 27М, 75С, 209С, 217С, 91, 124, длина базового размера которых составляет 215 мм ± 3 %.
- 5 При градации длины размерного ряда взрослых полустелек используется значение приращения из диапазона 7,5 мм ± 35 %. В зависимости от назначения изделия, возможно не равномерное приращение размерного ряда внутри артикула, в соответствии с указанным диапазоном приращений.
- 6 Полнота базового размера взрослых полустелек определяется по ГОСТ 3927, в соответствии с 8 половозрастной группой.
- 7 При градации размерного ряда взрослых полустелек, возможно изменение полноты от полноты базового размера. Полнота размеров с 34 по 40 определяется по 8 половозрастной группе; с 41 по 48 определяется по 9 половозрастной группе в соответствии с ГОСТ 3927.
- 8 Толщина в переднем отделе взрослых полустелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от переднего контура полустельки на расстояние 10 мм.
- 9 Значение толщины в переднем отделе стелек определяется с допуском ±0,5 мм.
- 10 Толщина в пяточном отделе взрослых полустелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от заднего контура полустельки на расстояние 30 мм.
- 11 Значение толщины в пяточном отделе полустелек определяется с допуском ±0,5 мм.
- 12 Высота внутреннего бортика определяется путем измерения расстояния от максимально высокой точки бортика до плоскости опоры (поверхности, на которой расположена стелька). Метод измерения ведется без приложения дополнительных нагрузок на внутренний бортик или изделие целиком.
- 13 Значение высоты внутреннего бортика полустелек определяется с допуском ±2 мм.
- 14 Значение массы взрослых полустелек определяется с допуском ±10 г.

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Таблицы 3А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические детские	136	Стельки детские	Рекомендуется для профилактики плоскостопия у детей.		2	2	15	46
Стельки ортопедические каркасные детские	152	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		2,5	4	18	40
Стельки лечебно-профилактические детские	133	Стельки детские	Рекомендуется для профилактики плоскостопия у детей.		1,5	1,5	5	28
Стельки ортопедические корректирующие детские "Косолапки"	24К	Стельки детские	Способствуют формированию сводов стопы, формируют и закрепляют правильный двигательный стереотип при ходьбе.		2	2	15	46
Стельки ортопедические детские	137	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия у		2,5	2,5	23	34
Стельки ортопедические каркасные детские "Оптима"	11Р	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		2,5	4	18	38
Стельки ортопедические детские	140	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		3	7,5	22	70
Стельки ортопедические каркасные детские	134	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		2	3	17	60

Продолжение приложения А

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические детские "Спорт"	20Е	Стельки детские	Рекомендуется для профилактики плоскостопия у детей. Снижают нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	4	21	46
Стельки ортопедические детские корректирующие "Эффект"	26Е	Стельки детские	Эффективно корректируют деформации стопы, сопровождающиеся боковыми ее отклонениями: варусную или вальгусную деформацию пяточных костей и среднего отдела стопы. Обеспечивают физиологически правильную установку стопы. Могут использоваться при плоскостопии, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп в этапном лечении		2	5	26	60
Стельки ортопедические детские корректирующие "Бейби"	65А	Стельки детские	Эффективно корректируют плоскостопие, а также деформации, сопровождающиеся боковыми ее отклонениями, в том числе вальгусную и плоско-вальгусную		2,5	4	24	77
Стельки ортопедические корректирующие детские "Забота"	18К	Стельки детские	Эффективно корректируют деформации стопы, сопровождающиеся боковыми ее отклонениями: варусную или вальгусную деформацию пяточных костей и среднего отдела стопы. Обеспечивают физиологически правильную установку стопы. Могут использоваться при плоскостопии, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп в этапном лечении		2,5	4,5	27	66

RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

 **ООО ЦПМИ**  **INFO@CPMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические детские	SB15	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		3	5	27	72
Стельки ортопедические детские "Медиум"	56E		Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		3	7,5	21	72

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Продолжение таблицы 3А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические детские	SB14	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		3,5	6	22	72

Примечания

- 1 Все детские стельки выпускаются в размерном ряде с 11 по 26 размеры.
- 2 Все детские стельки градируются, начиная от базового размера.
- 3 Базовым размером для всех детских стелек служит 18 размер.
- 4 Длина базового размера для детских стелек составляет $182 \text{ мм} \pm 3 \%$.
- 5 При градации длины размерного ряда детских стелек используется значение приращения из диапазона $10 \text{ мм} \pm 20 \%$. В зависимости от назначения изделия, возможно не равномерное приращение размерного ряда внутри артикула, в соответствии с указанным диапазоном приращений.
- 6 Полнота базового размера детских стелек определяется по ГОСТ 3927, в соответствии с 3 половозрастной группой.
- 7 Полнота размеров с 12 по 14 определяется по 1 половозрастной группе; с 15 по 16 определяется по 2 половозрастной группе; с 17 по 20 определяется по 3 половозрастной группе; с 21 по 24 определяется по 4 половозрастной группе; с 25 по 26 определяется по 5 половозрастной группе, в соответствии с ГОСТ 3927.
- 8 Толщина в переднем отделе детских стелек измеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от переднего контура стельки на расстояние 10 мм.
- 9 Значение толщины в переднем отделе стелек определяется с допуском $\pm 0,5 \text{ мм}$.
- 10 Толщина в пяточном отделе детских стелек измеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от заднего контура стельки на расстояние 20 мм.
- 11 Значение толщины в пяточном отделе стелек определяется с допуском $\pm 0,5 \text{ мм}$.
- 12 Высота внутреннего бортика определяется путем измерения расстояния от максимально высокой точки бортика до плоскости опоры (поверхности, на которой расположена стелька). Метод измерения ведется без приложения дополнительных нагрузок на внутренний бортик или изделие целиком.
- 13 Значение высоты внутреннего бортика стелек определяется с допуском $\pm 2 \text{ мм}$.
- 14 Значение массы детских стелек определяется с допуском $\pm 10 \text{ г}$.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.				
Лист				
№ докум.				
Подп.				
Дата				

Таблица 4А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Полустельки ортопедические детские	135	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28
Полустельки ортопедические детские	155	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28
Полустельки ортопедические детские	156	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28
Полустельки ортопедические детские	SB27	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28

Примечания

- 1 Все детские полустельки выпускаются в размерном ряде с 12 по 26 размеры.
- 2 Все детские полустельки градируются, начиная от базового размера.
- 3 Базовым размером для всех детских полустелек служит 18 размер.
- 4 Длина базового размера для детских полустелек составляет 127 мм ± 3 %.
- 5 При градации длины размерного ряда детских полустелек используется значение приращения из диапазона 10 мм ± 20 %. В зависимости от назначения изделия, возможно не равномерное приращение размерного ряда внутри артикула, в соответствии с указанным диапазоном приращений.
- 6 Полнота базового размера детских полустелек определяется по ГОСТ 3927, в соответствии с 3 половозрастной группой.
- 7 Полнота размеров с 12 по 14 определяется по 1 половозрастной группе; с 15 по 16 определяется по 2 половозрастной группе; с 17 по 20 определяется по 3 половозрастной группе; с 21 по 24 определяется по 4 половозрастной группе; с 25 по 26 определяется по 5 половозрастной группе, в соответствии с ГОСТ 3927.
- 8 Толщина в переднем отделе детских полустелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от переднего контура стельки на расстояние 10 мм.
- 9 Значение толщины в переднем отделе полустелек определяется с допуском ±0,5 мм.
- 10 Толщина в пяточном отделе детских полустелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от заднего контура стельки на расстояние 20 мм.
- 11 Значение толщины в пяточном отделе полустелек определяется с допуском ±0,5 мм.

Продолжение приложения А к Техническому заданию

Инв.№ подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 4А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
12 Высота внутреннего бортика определяется путем измерения расстояния от максимально высокой точки бортика до плоскости опоры (поверхности, на которой расположена стелька). Метод измерения ведется без приложения дополнительных нагрузок на внутренний бортик или изделие целиком.								
13 Значение высоты внутреннего бортика полустелек определяется с допуском ±2 мм.								
14 Значение массы детских полустелек определяется с допуском ±10 г.								

Продолжение приложения А

Прислано
Кон-Во: (вместо
ссылки)
«Орг.Ник»
А. Д. Бегунов



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Орто.Ник»

Н.Б. Беззубов



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

ЭТИКЕТКА

(Инструкция по применению)

ПОВА.944738.000 ЭТ-02

СТЕЛКИ И ПОЛУСТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

по ТУ 9396-002-77799226-2015

Наименование

Стельки и полустельки ортопедические по ТУ 9396-002-77799226-2015

Варианты исполнений

Наименование изделия	Арт и- кул	Обозначение конструкторского документа
1 Стельки ортопедические для модельной обуви "Ультра"	115	ПОВА.944738.002-001
2 Стельки ортопедические для модельной обуви "Бьюти"	SB10	ПОВА.944738.002-002
3 Стельки ортопедические для модельной обуви "Старс"	101	ПОВА.944738.002-003
4 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко-Грация"	19K	ПОВА.944738.002-004
5 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Мода"	111	ПОВА.944738.002-005
6 Стельки ортопедические "Эко Грация" полнопрофильные для обуви на высоком каблуке	SB03	ПОВА.944738.002-006
7 Стельки ортопедические	03P-2	ПОВА.944738.002-007
8 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко стиль"	78M	ПОВА.944738.002-008
9 Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	125	ПОВА.944738.002-009
10 Стельки ортопедические для модельной обуви "Бьюти"	SB11	ПОВА.944738.002-010
11 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко стиль"	SB04	ПОВА.944738.002-011
12 Стельки ортопедические для модельной обуви "Старс"	102	ПОВА.944738.002-012
13 Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	126	ПОВА.944738.002-013
14 Стельки ортопедические	SB24	ПОВА.944738.002-014
15 Стельки ортопедические	116	ПОВА.944738.002-015
16 Стельки ортопедические	114	ПОВА.944738.002-016
17 Стельки ортопедические	130	ПОВА.944738.002-017
18 Стельки ортопедические полнопрофильные "ЭВА"	25E	ПОВА.944738.002-018
19 Стельки ортопедические каркасные	108	ПОВА.944738.002-019
20 Стельки ортопедические каркасные	103	ПОВА.944738.002-020
21 Стельки ортопедические лечебно-профилактические	113	ПОВА.944738.002-021
22 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB13	ПОВА.944738.002-022
23 Стельки ортопедические полнопрофильные	17	ПОВА.944738.002-023
24 Стельки ортопедические полнопрофильные "Лада"	83	ПОВА.944738.002-024
25 Стельки ортопедические полнопрофильные "Лада"	87	ПОВА.944738.002-025
26 Стельки ортопедические лечебно-профилактические. "Спорт"	30E	ПОВА.944738.002-026
27 Стельки ортопедические каркасные	54	ПОВА.944738.002-027
28 Стельки ортопедические каркасные	106	ПОВА.944738.002-028
29 Стельки ортопедические лечебно-профилактические. "Зима"	31E	ПОВА.944738.002-029
30 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB12	ПОВА.944738.002-030
31 Стельки ортопедические полнопрофильные	104	ПОВА.944738.002-031
32 Стельки ортопедические каркасные	45	ПОВА.944738.002-032
33 Стельки ортопедические "АНТИШПОРА"	93	ПОВА.944738.002-033
34 Стельки ортопедические	131	ПОВА.944738.002-034
35 Стельки ортопедические мягкие "Софт"	68	ПОВА.944738.002-035
36 Стельки лечебно-профилактические	142	ПОВА.944738.002-036
37 Стельки ортопедические с высокими бортиками	SB23	ПОВА.944738.002-037
38 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB21	ПОВА.944738.002-038
39 Стельки лечебно-профилактические	122	ПОВА.944738.002-039
40 Стельки лечебно-профилактические массажные	89	ПОВА.944738.002-040
41 Стельки ортопедические каркасные	SB08	ПОВА.944738.002-041
42 Стельки ортопедические	112	ПОВА.944738.002-042
43 Стельки мягкие ортопедические	SB09	ПОВА.944738.002-043
44 Стельки лечебно-профилактические	100	ПОВА.944738.002-044

45 Стельки ортопедические разгружающие. "Диабетические"	Д2-2	ПОВА.944738.002-045
46 Стельки ортопедические	SB19	ПОВА.944738.002-046
47 Стельки ортопедические мягкие	76	ПОВА.944738.002-047
48 Стельки лечебно-профилактические	139	ПОВА.944738.002-048
49 Стельки ортопедические лечебно-профилактические "Арми"	97	ПОВА.944738.002-049
50 Стельки ортопедические разгружающие "Элит" с эффектом памяти	Д3-2	ПОВА.944738.002-050
51 Стельки ортопедические "Индивидуальные"	53И	ПОВА.944738.002-051
52 Стельки ортопедические каркасные "ЭЛИТ"	29К	ПОВА.944738.002-052
53 Стельки ортопедические каркасные	90	ПОВА.944738.002-053
54 Стельки ортопедические с покрытием из натуральной шерсти "Элит зима"	50Т	ПОВА.944738.002-054
55 Стельки ортопедические с высокими бортиками	88	ПОВА.944738.002-055
56 Стельки ортопедические для уменьшения нагрузки на позвоночник	SB18	ПОВА.944738.002-056
57 Стельки лечебно-профилактические	141	ПОВА.944738.002-057
58 Стельки ортопедические с высокими бортиками "Бейс"	77	ПОВА.944738.002-058
59 Стельки ортопедические для уменьшения нагрузки на позвоночник	107	ПОВА.944738.002-059
60 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB22	ПОВА.944738.002-060
61 Стельки ортопедические мягкие "Комфорт"	38К	ПОВА.944738.002-061
62 Стельки ортопедические полнопрофильные	105	ПОВА.944738.002-062
63 Стельки ортопедические	SB25	ПОВА.944738.002-063
64 Стельки ортопедические, каркасные. "Оптимa"	10Р	ПОВА.944738.002-064
65 Стельки гелевые с биомагнитным воздействием.	85	ПОВА.944738.002-065
66 Стельки лечебно-профилактические	146	ПОВА.944738.002-066
67 Стельки ортопедические мягкие с покрытием из натуральной овечьей шерсти "зимний Комфорт"	38Т	ПОВА.944738.002-067
68 Стельки ортопедические с покрытием из натурального меха. "Зимний уют"	22Т	ПОВА.944738.002-068
69 Стельки ортопедические разгружающие "Микс"	110М	ПОВА.944738.002-069
70 Стельки лечебно-профилактические	96	ПОВА.944738.002-070
71 Стельки лечебно-профилактические	86	ПОВА.944738.002-071
72 Стельки ортопедические мягкие с покрытием из натуральной овечьей шерсти	74	ПОВА.944738.002-072
73 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко лайт"	SB02	ПОВА.944738.002-073
74 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB20	ПОВА.944738.002-074
75 Стельки ортопедические каркасные "VICTORY - HIGH"	99	ПОВА.944738.002-075
76 Стельки ортопедические лечебно-профилактические для водителей "Драйвер"	94	ПОВА.944738.002-076
77 Стельки ортопедические для разгрузки коленных суставов "Флекс"	57	ПОВА.944738.002-077
78 Стельки лечебно-профилактические	143	ПОВА.944738.002-078
79 Стельки лечебно-профилактические	147	ПОВА.944738.002-079
80 Стельки ортопедические с зонами разгрузки "Комби"	SB07	ПОВА.944738.002-080
81 Стельки лечебно-профилактические	81	ПОВА.944738.002-081
82 Стельки ортопедические каркасные "Актив"	55А	ПОВА.944738.002-082
83 Стельки лечебно-профилактические	127	ПОВА.944738.002-083
84 Стельки лечебно-профилактические	79	ПОВА.944738.002-084
85 Стельки ортопедические полнопрофильные "Бабочка"	95	ПОВА.944738.002-085

86 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко лайт"	82М	ПОВА.944738.002-086
87 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко"	59К	ПОВА.944738.002-087
88 Стельки лечебно-профилактические	144	ПОВА.944738.002-088
89 Стельки ортопедические "ЭКО-натура"	98	ПОВА.944738.002-089
90 Стельки ортопедические каркасные "Польза"	49К	ПОВА.944738.002-090
91 Стельки ортопедические каркасные с вентилируемым покрытием "Бриз"	67	ПОВА.944738.002-091
92 Стельки лечебно-профилактические	148	ПОВА.944738.002-092
93 Стельки ортопедические лечебно-профилактические для спортивной обуви "Терм"	109	ПОВА.944738.002-093
94 Стельки ортопедические силиконовые	84	ПОВА.944738.002-094
95 Стельки лечебно-профилактические	128	ПОВА.944738.002-095
96 Стельки ортопедические	92	ПОВА.944738.002-096
97 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко"	SB01	ПОВА.944738.002-097
98 Стельки ортопедические полнопрофильные	80Н	ПОВА.944738.002-098
99 Стельки ортопедические полнопрофильные "VICTORY"	23К	ПОВА.944738.002-099
100 Стельки ортопедические полнопрофильные "VICTORY - ANTISHOCK"	69	ПОВА.944738.002-100
101 Стельки ортопедические полнопрофильные	117	ПОВА.944738.002-101
102 Стельки лечебно-профилактические	145	ПОВА.944738.002-102
103 Стельки лечебно-профилактические	129	ПОВА.944738.002-103
104 Стельки лечебно-профилактические	149	ПОВА.944738.002-104
105 Полустельки ортопедические "Блейд"	121	ПОВА.944738.003-001
106 Стельки лечебно-профилактические прозрачные для модельной обуви	209С	ПОВА.944738.003-002
107 Полустельки ортопедические для использования в модельной обуви с высотой каблука до 7см.	66К	ПОВА.944738.003-003
108 Стельки ортопедические силиконовые $\frac{3}{4}$ "Ароматизированные"	75С	ПОВА.944738.003-004
109 Полустельки ортопедические "Модельные"	27М	ПОВА.944738.003-005
110 Полустельки ортопедические	71В	ПОВА.944738.003-006
111 Полустельки лечебно- профилактические с изменяемой шириной пятки "Вариант"	119	ПОВА.944738.003-007
112 Полустельки ортопедические	SB26	ПОВА.944738.003-008
113 Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	217С	ПОВА.944738.003-009
114 Полустельки ортопедические "Модельные лайт"	60К	ПОВА.944738.003-010
115 Полустельки ортопедические каркасные "Оптима лайт"	64К	ПОВА.944738.003-011
116 Полустельки ортопедические каркасные "Оптима"	09Р	ПОВА.944738.003-012
117 Полустельки ортопедические для модельной обуви "Подиум"	73К	ПОВА.944738.003-013
118 Полустельки ортопедические силиконовые	120	ПОВА.944738.003-014
119 Стельки ортопедические $\frac{3}{4}$	124	ПОВА.944738.003-015
120 Полустельки мягкие ортопедические "Комфорт лайт"	72К	ПОВА.944738.003-016
121 Стельки ортопедические $\frac{3}{4}$	91	ПОВА.944738.003-017
122 Полустельки ортопедические "Стиль"	118	ПОВА.944738.003-018
123 Стельки лечебно-профилактические детские	136	ПОВА.944738.004-001
124 Стельки ортопедические каркасные детские	152	ПОВА.944738.004-002
125 Стельки лечебно-профилактические детские	133	ПОВА.944738.004-003
126 Стельки ортопедические корректирующие детские "Косолапики"	24К	ПОВА.944738.0044004
127 Стельки ортопедические детские	137	ПОВА.944738.004-005
128 Стельки ортопедические каркасные детские "Оптима"	11Р	ПОВА.944738.004-006
129 Стельки ортопедические детские	140	ПОВА.944738.004-007
130 Стельки ортопедические каркасные детские	134	ПОВА.944738.004-008

131 Стельки ортопедические детские	154	ПОВА.944738.004-009
132 Стельки ортопедические каркасные детские	153	ПОВА.944738.004-010
133 Стельки ортопедические детские "Топ-Топ"	32К	ПОВА.944738.004-011
134 Стельки ортопедические детские	150	ПОВА.944738.004-012
135 Стельки ортопедические детские	151	ПОВА.944738.004-013
136 Стельки ортопедические детские	138	ПОВА.944738.004-014
137 Стельки ортопедические детские с покрытием из натуральной шерсти "Зима"	51Т	ПОВА.944738.004-015
138 Стельки ортопедические каркасные детские	SB17	ПОВА.944738.004-016
139 Стельки ортопедические каркасные детские	SB16	ПОВА.944738.004-017
140 Стельки ортопедические корректирующие детские "Эффект плюс"	58П	ПОВА.944738.004-018
141 Стельки ортопедические каркасные детские	132	ПОВА.944738.004-019
142 Стельки ортопедические детские корректирующие "Бейби"	SB05	ПОВА.944738.004-020
143 Стельки лечебно-профилактические детские	123	ПОВА.944738.004-021
144 Стельки лечебно-профилактические детские "Спорт"	20Е	ПОВА.944738.004-022
145 Стельки ортопедические детские корректирующие "Эффект"	26Е	ПОВА.944738.004-023
146 Стельки ортопедические детские корректирующие "Бейби"	65А	ПОВА.944738.004-024
147 Стельки ортопедические корректирующие детские "Забота"	18К	ПОВА.944738.004-025
148 Стельки ортопедические детские	SB15	ПОВА.944738.004-026
149 Стельки ортопедические детские "Медиум"	56Е	ПОВА.944738.004-027
150 Стельки ортопедические детские	SB14	ПОВА.944738.004-028
151 Полустельки ортопедические детские	135	ПОВА.944738.005-001
152 Полустельки ортопедические детские	155	ПОВА.944738.005-002
153 Полустельки ортопедические детские	156	ПОВА.944738.005-003
154 Полустельки ортопедические детские	SB27	ПОВА.944738.005-004

Эксплуатационный документ распространяется на следующие артикулы:

17	65А	140
18К	77	150
22Т	83	SB05
24К	87	SB12
25Е	88	SB13
26Е	95	SB20
49К	104	SB21
57	132	SB22
58П	136	SB23

Показания к применению

Стельки и полустельки предназначены для лечения и профилактики заболеваний стопы, а также для создания комфортных условий пользователям, которые имеют различного рода деформацию стопы.

Стельки и полустельки предназначены для индивидуального использования.

Технические характеристики

При изготовлении стелек и полустелек должны быть использованы материалы, указанные в таблице

Название материала и красителей	Фирма-изготовитель, страна или нормативный документ
Кожа компрессионная регенерированная (кожаная стружка, латекс), арт. Special NSS	Алькор, Италия
Искусственная кожа Поливинилхлорид (ПВХ пленка). Артикул Lai-porellina	Sisa, Италия
Подкладочный материал Microliner полиэстер/полиамид	Huzhou Forince Textile CO.LTD, Китай
Подкладочный материал ST1304 NP silbe полиамид	Two group Германия
Драйсол стелечный материал Вискоза/Полиамид/Полиэстр	Two group Германия
Подкладочный материал арт. SC 1350N 044 (bedun) 60% Latex, 40% Polyester	Quanzhou Hengdali Import and export Китай
Материал Неоперн 100% бутадиен-стирольный каучук	Chuan Hui int, Китай
Подкладочный материал Line Kappa100% вспененный ПВХ	Two group Германия
Материал Спайдер12%вискозы88%бутадиенстирольный каучук	Zahonero, Испания
Ортофом «Primacell» Вспененный пенополиэтилен 100%	Голион, Франция
Материал Мемори Фоам вспененный латекс, полиэстер	Emsold, Германия
Лента 8160 PET 12 акриловый клей на полиэфирном носителе	Свифт Кемикал, Италия
Материал Параскин полиэтилентерефталат/полипроплен/	Two group, Германия
Материал Ноу слип DOP - 20% PVC- 30% CaCo3 - 30%	Changie Ypuyan Textile, Китай
Термопласт смесь из тенополимера на основе полиэстера/полиуретан. Артикулы : Biorel 08, Relion 015, Relion 020	Technogy, Италия
Резинка для брителей полиэстер/ латекс	Веллеткс, Китай
Микропласт PA-MICROPLAST 25443-00 100% полиамид.	Мираль, Германия
Силикон Esoflex 030, Silimold AKP 08 (силикон медицинский)	Алькор, Италия
Скотч двухсторонний ПВХ Поливинилхлорид	Foshan City Nanhai Zemu Xiang Adhesive Pcts., Ltd. Китай
Интерлок трикотажное х/б полотно	Ресстекс, Турция
Микрофибра Vermont and Versales Crudo (нейлон 60 %, полиуретан 40%)	Tejidos Roca, Испания
Материал НО грипп (бутадиен- стирильного каучука с вискозной тканью - 100%)	Zahonero, Испания
Материал Пенка (пенополиуретан)	Aureright, Китай
Материал Borreguillo(20% полиэстер,80% бутадиен-стирольный каучук)	Zahonero, Испания
Вкладные элементы(амортизаторы, валики): вспененный латекс. Carbosan	Emsold, Германия
Материал Sharc 1 (полиамид-91%, полиэстер-4%, серебряная нить - 5%)	Vegam, Италия
KEVLAR 80 LOGO Поливинилхлорид (ПВХ пленка)	Coronet SPA, Италия
Ламинированный текстильный материал 50% силикона, 50% хлопка, арт. HSTA5050E-2828-480	Hong Yang Textile, Китай
Намагниченная резина «постоянный магнит» (винил, ферритный порошок Sr 0.6 Fe 203)	AIC Magnetics Ltd., Китай
Эластичная лента 70%полезфир 30%латекс	ОСТ Р 17-10-883-93, ООО Производственная компания Ультратекс
Креатекс шерсть 80% овечий пух/ 20%ПЭ	ТУ 8390-001-57904514-2013, ОАО Фанема
Спилок-велюр вид натурального кожевенного материала	ТУ 17-06-95-84 . ОАО Русская Кожа.Рязань
Полотно полиэфирное, Артикул 200	ТУ 8397-016-22739674-2014, ОАО Предприятие Нетканых Материалов
Иглопробивной материал полиэфирное полотно, Артикул С3/3Л	ТУ 8397-030-00300297-2007, ОАО Термопласт
Нитки лавсановые 45ЛЛ армированные с полиэфирной оплёткой	ГОСТ 6309-93, ОАО «ПНК

	ИМ КИРОВА»
Лист пенополителена ППЭ 1П	ТУ 2246-01-10489953-98, ООО ЭТИОЛ
Кожи (крупнорогатого скота) Артикул КРС (0,9-1,1мм)	ГОСТ 940-81, ГОСТ 1838-91, ОАО Вахруши ЮФть
Пенополиэтилен ППЭ-2М, ППЭ-3М	ТУ 2246-001-10489953-98, ООО Этиол
Изолон ПСЭВ	ТУ 2244-013-00203476 ОАО Ижевский завод пластмасс
Пеносевилен СЭВ-1, СЭВ-2, СЭВ-3	ТУ 55 221 1350 ,ООО Этиол
Пласты коры пробкового дуба, плиты прессованные из пробковой крошки.Артикул 1/75	Vega Industries, Испания
Пластмасса ПЭТ (полиэтилен) Артикул Пластик А-ПЭТ Novattro 2х1250х2050 мм прозрачный, Пластик А-ПЭТ Novattro 0,5х1250х2050 мм прозрачный	ТУ 2246-010-81057157-2014 ООО "СафПласт"
Лента велкро полиамид	ТУ 17-15-14-90. ОАО Лента. Беларусь
ЭВА (пластины пористые эвапласт этиленвинилацетат)	СТО 8741-016-00300209-2014 ОАО Искож и ООО Экопром
Искусственный нубук (полиэстер), Артикул эксперт 1.2	Lifli Rulo ve Levha San,Турция
Полиуретановый гель (8118М48-А; 220М19-В)	Jinsheng Industrial Co.,Ltd. Китай
Каркасы из полипропилена 30 марки	ТУ 2211-001-76332549 ООО Сурсил
Краситель Solvent Blue 104 (синий), Solvent Red 135 (красный), Solvent Yellow 114 (жёлтый)	Huzhou Forince Textile CO.LTD,Китай
Краситель Luconyl	Zahonero, Испания
Концентрат "БАСКО"6 (Перламутровый)	ООО «Этиол», г. Владимир
Краситель П 514	ОАО «Искож», г. Киров
Краситель GHS Beige nylon GN08 (бежевый)	Chuan Hui int, Китай
Краситель Silc PIG (0.11) (зелёный)	Jinsheng Industrial Co.,Ltd. Китай

Основные характеристики стелек и полустелек см. Приложение А

Жесткие детали из термопластичных и влагоотверждаемых материалов должны изготавливаться в сочетании со смягчающе-разгружающим слоем толщиной не более 5 мм.

Стельки и полустельки должны состоять из следующих деталей: верхнего покрытия, нижнего покрытия (при необходимости) и межстелечного слоя.

Межстелечный слой должен изготавливаться цельноформованным (однослойным) или наборным (многослойным).

Межстелечный слой может быть выполнен в виде выкладки внутреннего продольного свода, выкладки внутреннего и наружного продольного сводов, выкладки поперечного свода.

Наружные края стелек и полустелек должны быть обработаны в обрезку и должны иметь чистый без выхватов срез.

В наружных края стелек и полустелек с использованием термопластичных материалов допускается обработка жестких деталей в обрезку.

Склеенные между собой детали стелек и полустелек должны плотно прилегать друг к другу без видимого зазора.

Стельки и полустельки должны быть без морщин, пятен, загрязнений, следов клея, механических повреждений, местных отслоений деталей.

Стельки и полустельки должны быть устойчивы к санитарной обработке, состоящей из протирания теплым мыльным раствором с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С, протирания водой с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С и сушки.

Стельки и полустельки должны быть устойчивы к агрессивным биологическим жидкостям (пот).

Стельки гелевые с биомагнитным воздействием должны иметь на верхней поверхности стельки величину магнитной индукции (40 ± 15) мТл.

Стельки и полустельки должны быть сохранять свои свойства в рабочих климатических условиях, которые соответствуют УЗ.1, УХЛЗ.1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 20 до плюс 40°С.

Стельки и полустельки, упакованные в транспортную тару, должны быть устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании и соответствующим указанным в ГОСТ Р 50444 для условий транспортирования.


Средний срок службы стелек и полустелек до списания должен быть не менее 6 месяцев. Средний срок хранения стелек (артикулов 84,209С, 75С, 217С, 120) при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей должен быть не менее 24 месяцев, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 48 месяцев

По возможным последствиям отказа в процессе эксплуатации стельки и полустельки относятся к классу Г по РД 50-707.

По потенциальному риску применения стельки и полустельки относятся к классу 1.

Номенклатурное обозначение стелек и полустелек – 250260.

Внешний вид базовых образцов

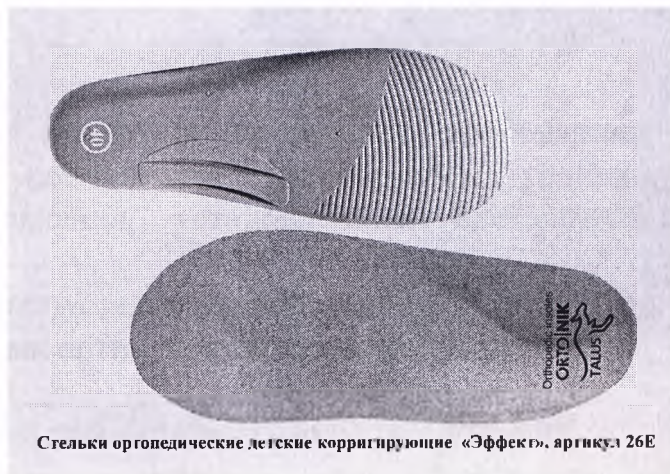

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Показания к применению – см. Приложение А

Противопоказания – фиксированные деформации стоп, переломы стоп, открытые раны на подошвенной поверхности стоп, индивидуальная непереносимость, необходимо проконсультироваться с врачом.

Возможные побочные действия – нет.

Транспортирование и хранение

Стельки и полустельки могут перевозиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением требований, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования стелек и полустелек должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Хранение стелек и полустелек у изготовителя должно осуществляться в транспортной упаковке с соблюдением условий хранения при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей.

Указания по эксплуатации

При эксплуатации стелек и полустелек должны соблюдаться указания, помещенные в этикетке.

Указания по утилизации

Материалы, из которых изготовлены стельки и полустельки, являются безопасными для человека и окружающей среды.

Стельки и полустельки после их использования могут быть утилизированы как бытовой мусор класса опасности А.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие стелек и полустелек требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок использования стелек и полустелек (артикулов 84 209С, 75С, 217С, 120) – 2 месяца, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 6 месяцев.

Срок гарантии устанавливается со времени выдачи стелек и полустелек или их продажи согласно копии товарного чека.

В течение гарантийного срока в случае выявления производственного дефекта и (или) несоответствия медицинским показаниям предприятие-изготовитель производит ремонт или изготовление стелек и полустелек бесплатно.

Гарантийный срок хранения стелек и полустелек (артикулов 84 209С, 75С, 217С, 120) – 12 месяцев со дня изготовления, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 36 месяцев.

Дата изготовления указана на упаковке.

Количество- штук.

Артикул: №.....

ТУ 9396-002-77799226-2015

Изготовитель:

ООО «Орто.Ник»

Адрес места нахождения: 194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д.3, литер Л, помещение 1-Н, комната 125;

e-mail: stelki@mail.ru; ИНН 7810043090

тел. (812) 677-46-47

Претензии потребителей принимаются Изготовителем.

Приёмка

Стельки и полустельки приняты ОТК фирмы ООО
и соответствуют требованиям ТУ 9396-002-77799226-2015

Подпись

Штамп ОТК

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические для модельной обуви "Ультра"	115	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		1	2	22	88
Стельки ортопедические для модельной обуви "Бьюти"	SB10	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		1,5	1,5	22	96
Стельки ортопедические для модельной обуви "Старс"	101	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		2	2	22	85
Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко-Грация"	19К	Стельки взрослые	Предназначены для повседневной и модельной обуви с высотой каблука до 10 см. Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		2	3	18	106
Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Мода"	111	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Снимают усталость и боли в ногах, эффективно разгружают передний отдел стопы.		2	3	22	87

Приложение А
(обязательное)

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические "Эко Грация" полнопрофильные для обуви на высоком каблуке	SB03	Стельки взрослые	Предназначены для повседневной и модельной обуви с высотой каблука до 10 см. Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		2	3	23	106
Стельки ортопедические	03P-2	Стельки взрослые	Профилактика и лечение продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия и вальгусной и плоско-вальгусной		2,5	2,5	7	46
Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко стиль"	78M	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Снимают усталость и боли в ногах, эффективно разгружают передний отдел стопы.		2,5	3	22	98
Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	125	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики поперечного плоскостопия, создание комфорта при ходьбе в модельной обуви с высоким каблуком. Препятствуют скольжению стопы вперед в обуви.		1,5	1,5	22	55
Стельки ортопедические для модельной обуви "Бьюти"	SB11	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		1,5	1,5	22	96

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Продолжение таблицы 1А									
					Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики					
										Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г	
					Стельки ортопедические каркасные	106	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2,5	8,5	22	70	
					Стельки ортопедические лечебно-профилактические. "Зима"	31Е	Стельки взрослые	Рекомендуются для зимней и демисезонной обуви. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		3	5	25	73	
					Стельки ортопедические полнопрофильные	SB12	Стельки взрослые	Рекомендуется для коррекции продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		1,5	4	27	75	
					Стельки ортопедические полнопрофильные	104	Стельки взрослые	Рекомендуется для коррекции продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		1,5	6	27	82	
	Лист													

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подл. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические каркасные	45	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	7	25	75
Стельки ортопедические "АНТИШПОРА"	93	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики пяточных шпор, болезни Шинца, болей в пятке различного происхождения.		2,5	5	25	75
Стельки ортопедические	131	Стельки взрослые	Рекомендуются для профилактики и лечения продольного и поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе. Предназначены для зимней и демисезонной обуви.		2,5	8	22	66
Стельки ортопедические мягкие "Софт"	68	Стельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном). Могут использоваться в модельной, спортивной и повседневной обуви		3	5,5	9	56
Стельки лечебно-профилактические	142	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на стопу.		3	6	19	61

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Итого	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические каркасные	SB08	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	7	25	75
Стельки ортопедические	112	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		2	9	25	70
Стельки мягкие ортопедические	SB09	Стельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном). Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		2,5	2,5	11	72
Стельки лечебно-профилактические	100	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		3	4	15	70

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Копия №	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические разгружающие. "Диабетические"	Д2-2	Стельки взрослые	Рекомендуются при "диабетической стопы", деформациях стопы при ревматоидном полиартрите, подагре и других заболеваниях, сопровождающихся выраженными и фиксированными деформациями стопы, а также при нейро- и ангиопатии различной этиологии.		3	4	20	64
Стельки ортопедические	SB19	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики пяточных шпор, болезни Шинца, болей в пятке различного происхождения.		3	5	25	68
Стельки ортопедические мягкие	76	Стельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном). Могут использоваться в модельной,		3	6	11	58
Стельки лечебно-профилактические	139	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на		3	6	19	55
Стельки ортопедические лечебно-профилактические "Арми"	97	Стельки взрослые	Рекомендуются для военной, спортивной и повседневной обуви. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		4	5	17	82

Продолжение приложения А

Изм. № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические разгружающие "Элит" с эффектом памяти	ДЗ-2	Стельки взрослые	Рекомендуются для снижения нагрузки на стопу: в повседневной и спортивной обуви для комфорта и профилактики перегрузки стопы, а также при многих ортопедических проблемах: продольное и поперечное плоскостопие (фиксированные или частично фиксированные деформации); деформация стопы при ревматоидном полиартрите, подагре; синдроме "диабетической стопы"; нейро- и ангиопатии различной		4,5	6	22	82
Стельки ортопедические "Индивидуальные"	53И	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики различных видов плоскостопия и других деформаций стопы, создание комфорта при ходьбе. Конструкция стелек позволяет учесть все		2	4	24	86
Стельки ортопедические каркасные "ЭЛИТ"	29К	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	7	25	77

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Год изд.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические каркасные	90	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную наг-рузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		2,5	7	27	90
Стельки ортопедические с покрытием из натуральной шерсти "элит зима"	50Т	Стельки взрослые	Рекомендуются для профилактики и лечения продольного и поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе. Предназначены для зимней и демисезонной обуви.		2,5	8	22	64
Стельки ортопедические с высокими бортиками	88	Стельки взрослые	Рекомендуется использовать для реабилитации после всех типов переломов лодыжек и костей стопы; после травм и операций в области стопы и голеностопного сустава; при деформациях и нестабильность голеностопного сустава, нарушении тонуса мышц стопы и голени коррекция нефиксированных деформаций стоп, в том числе у подростков. Также могут использоваться в специальной обуви (коньки, ролики и т.п.), в ортопедической обуви для		3	3	41	101
Стельки ортопедические для уменьшения нагрузки на позвоночник	SB18	Стельки взрослые	Рекомендуются при повышенных нагрузках на опорно-двигательный аппарат.		3	4	20	82

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические	141	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на		3	6	19	58
Стельки ортопедические с высокими бортиками "Бейс"	77	Стельки взрослые	Рекомендуется использовать для реабилитации после всех типов переломов лодыжек и костей стопы; после травм и операций в области стопы и голеностопного сустава; при деформациях и нестабильности голеностопного сустава, нарушении тонуса мышц стопы и голени коррекция нефиксированных деформаций стоп, в том числе у подростков. Также могут использоваться в специальной обуви (коньки, ролики и т.п.), в ортопедической обуви для		4	3	41	114
Стельки ортопедические для уменьшения нагрузки на позвоночник	107	Стельки взрослые	Рекомендуются при повышенных нагрузках на опорно-двигательный аппарат.		4,5	6	22	90
Стельки ортопедические полнопрофильные	SB22	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		2	2	32	98
Стельки ортопедические мягкие "Комфорт"	38K	Стельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном). Могут использоваться в модельной, спортивной и повседневной обуви		2,5	2,5	11	72

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические полнопрофильные	105	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Эффективно снимают боли в ногах, разгружают передний отдел стопы.		2,5	2,5	25	120
Стельки ортопедические	SB25	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную наг-рузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		2,5	6	23	96
Стельки ортопедические, каркасные. "Оптима"	10P	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной		2,5	8,5	22	60
Стельки гелевые с иомаг-нитным воздействием.	85	Стельки взрослые	Длительное пребывание на ногах, боли в мышцах ног и спины, венозная недостаточность и варикозное расширение вен нижних конечностей.		3	3	3	105
Стельки лечебно-профилактические	146	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		3	5	18	65
Стельки ортопедические мягкие с покрытием из натуральной овечьей шерсти "зимний Комфорт"	38T	Стельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном).		3,5	4	11	60

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 1А

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Инв.№	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические	147	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		3,5	5	15	68
Стельки ортопедические с зонами разгрузки "Комби"	SB07	Стельки взрослые	Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		4	5	25	72
Стельки лечебно-профилактические	81	Стельки взрослые	Бережно поддерживают своды стопы; уменьшают нагрузку на суставы; разгружают передний отдел стопы; оказывают точечное воздействие на стопу, улучшая кровообращение.		4	7	4	58
Стельки ортопедические каркасные "Актив"	55А	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Применяются в спортивной, повседневной и летней обуви, а также при повышенной потливости		4	8	24	72
Стельки лечебно-профилактические	127	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	10	18	76
Стельки лечебно-профилактические	79	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе.		4,5	4,5	4,5	55
Стельки ортопедические полнопрофильные "Бабочка"	95	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения поперечного и комбинированного плоскостопия, деформирующего артроза суставов пальцев стопы. Эффективно снимают боли в ногах, разгружают передний отдел стопы.		2	2,5	25	116

Продолжение приложения А

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко лайт"	82М	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Снимают боли в ногах, эффективно разгружают передний отдел стопы.		2	3	25	94
Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко"	59К	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Снимают усталость и боли в ногах, эффективно разгружает передний отдел стопы.		2,5	3	25	110
Стельки лечебно-профилактические	144	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на		3	6	19	67
Стельки ортопедические "ЭКО-натура"	98	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Эффективно снимают боли в ногах, разгружают передний отдел стопы.		3	9	24	84
Стельки ортопедические каркасные "Польза"	49К	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, профилактики статических деформаций стопы. Усиленный		3	9	29	108
Стельки ортопедические каркасные с вентилируемым покрытием "Бриз"	67	Стельки взрослые	Применяется в спортивной, повседневной и летней обуви, а также при повышенной потливости ног. Используются для профилактики и лечение продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Разгружают коленные, тазобедренные суставы и		3,5	9	29	81

Продолжение приложения А

					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические	148	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	6	18	71
Стельки ортопедические лечебно-профилактические для спортивной обуви "Терм"	109	Стельки взрослые	Снимает усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник. Обладают антибактериальным эффектом		4	7	22	58
Стельки ортопедические силиконовые	84	Стельки взрослые	Поперечное плоскостопие I-II степени, продольное плоскостопие I-II степени, комбинированное плоскостопие, пяточная шпора, натоптыши под головками плюсневых костей и на кончиках пальцев стопы, вальгусная деформация стоп. Боли в подошвенной части стопы, связанные с артрозом суставов стоп, плоскостопием, пяточной шпорой и трофическими расстройствами. Эндартериит и атеросклероз суставов нижних конечностей.		4	7	22	140
Стельки лечебно-профилактические	128	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	10	18	80
Стельки ортопедические	92	Стельки взрослые	Профилактика и лечение продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Применяется при варикозной болезни, болях и отеках ног; интенсивной нагрузки на ноги и длительного ношения обуви; повышенное потоотделение ног,		4	10	28	82

Продолжение приложения А

Инв. № подл.		Подл. и		Изм. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Продолжение таблицы 1А									
Наименование изделия		Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
						Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические		145	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на		3	6	19	70
Стельки лечебно-профилактические		129	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	10	26	85
Стельки лечебно-профилактические		149	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4,5	6,5	18	74
Примечания 1 Все взрослые стельки выпускаются в размерном ряде с 34 по 48 размеры. 2 Все взрослые стельки градируются, начиная от базового размера. 3 Базовым размером для всех взрослых стелек и полустелек служит 39 размер. 4 Длина базового размера для взрослых стелек составляет 253 мм ± 3 %. 5 При градации длины размерного ряда взрослых стелек используется значение приращения из диапазона 7,5 мм ± 35 %. В зависимости от назначения изделия, возможно не равномерное приращение размерного ряда внутри артикула, в соответствии с указанным диапазоном приращений. 6 Полнота базового размера взрослых стелек определяется по ГОСТ 3927, в соответствии с 8 половозрастной группой. 7 Полнота размеров с 34 по 40 определяется по 8 половозрастной группе; с 41 по 48 определяется по 9 половозрастной группе в соответствии с ГОСТ 3927. 8 Толщина в переднем отделе взрослых стелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от переднего контура стельки на расстояние 10 мм. 9 Значение толщины в переднем отделе стелек определяется с допуском ±0,5 мм. 10 Толщина в пяточном отделе взрослых стелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от заднего контура стельки на расстояние 30 мм. 11 Значение толщины в пяточном отделе стелек определяется с допуском ±0,5 мм. 12 Высота внутреннего бортика определяется путем измерения расстояния от максимально высокой точки бортика до плоскости опоры (поверхности, на которой расположена стелька). Метод измерения ведется без приложения дополнительных нагрузок на внутренний бортик или изделие целиком. 13 Значение высоты внутреннего бортика стелек определяется с допуском ±2 мм. 14 Значение массы взрослых стелек определяется с допуском ±10 г.									

Продолжение приложения А

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Полустельки ортопедические	71В	Полустельки взрослые	Для создания комфорта и снятия боли в обуви со средним и высоким каблуком.		3	3	3	26
Полустельки лечебно-профилактические с изменяемой шириной пятки "Вариант"	119	Полустельки взрослые	Рекомендуется для профилактики поперечного плоскостопия, создание комфорта при ходьбе в модельной обуви. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на передний отдел стопы.		3,5	0	2	27
Полустельки ортопедические	SB26	Полустельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степени. Снимают усталость и боли в ногах, повышают комфортность обуви.		1	1	24	48
Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	217С	Полустельки взрослые	При болезненных ощущениях и повышенной утомляемости при ходьбе в модельной обуви и обуви на высоких каблуках. Создают комфорт при ходьбе, разгружают пятку и передний отдел стопы, препятствует образованию натоптышей и наминов.		1,5	3,5	3,5	38
Полустельки ортопедические "Модельные лайт"	60К	Полустельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики поперечного плоскостопия, создание комфорта при ходьбе в обуви с высоким каблуком. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на передний отдел стопы.		1,5	1,5	1,5	37

WWW.GOSDRAVNADZOR.RU

Продолжение приложения А

Продолжение таблицы 2А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Полустельки ортопедические "Стиль"	118	Полустельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном,		2	4	25	51

Примечания

- 1 Все взрослые полустельки выпускаются в размерном ряде с 34 по 48 размеры.
- 2 Все взрослые полустельки градируются, начиная от базового размера.
- 3 Базовым размером для всех взрослых полустелек служит 39 размер.
- 4 Длина базового размера для взрослых полустелек составляет $177 \text{ мм} \pm 3 \%$. Исключения составляют артикулы 60К, 119, 27М, 75С, 209С, 217С, 91, 124, длина базового размера которых составляет $215 \text{ мм} \pm 3 \%$.
- 5 При градации длины размерного ряда взрослых полустелек используется значение приращения из диапазона $7,5 \text{ мм} \pm 35 \%$. В зависимости от назначения изделия, возможно не равномерное приращение размерного ряда внутри артикула, в соответствии с указанным диапазоном приращений.
- 6 Полнота базового размера взрослых полустелек определяется по ГОСТ 3927, в соответствии с 8 половозрастной группой.
- 7 При градации размерного ряда взрослых полустелек, возможно изменение полноты от полноты базового размера. Полнота размеров с 34 по 40 определяется по 8 половозрастной группе; с 41 по 48 определяется по 9 половозрастной группе в соответствии с ГОСТ 3927.
- 8 Толщина в переднем отделе взрослых полустелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от переднего контура полустельки на расстояние 10 мм.
- 9 Значение толщины в переднем отделе стелек определяется с допуском $\pm 0,5 \text{ мм}$.
- 10 Толщина в пяточном отделе взрослых полустелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от заднего контура полустельки на расстояние 30 мм.
- 11 Значение толщины в пяточном отделе полустелек определяется с допуском $\pm 0,5 \text{ мм}$.
- 12 Высота внутреннего бортика определяется путем измерения расстояния от максимально высокой точки бортика до плоскости опоры (поверхности, на которой расположена стелька). Метод измерения ведется без приложения дополнительных нагрузок на внутренний бортик или изделие целиком.
- 13 Значение высоты внутреннего бортика полустелек определяется с допуском $\pm 2 \text{ мм}$.
- 14 Значение массы взрослых полустелек определяется с допуском $\pm 10 \text{ г}$.

Инв. № подл.	Подл. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Таблицы 3А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические детские	136	Стельки детские	Рекомендуется для профилактики плоскостопия у детей.		2	2	15	46
Стельки ортопедические каркасные детские	152	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		2,5	4	18	40
Стельки лечебно-профилактические детские	133	Стельки детские	Рекомендуется для профилактики плоскостопия у детей.		1,5	1,5	5	28
Стельки ортопедические корректирующие детские "Косолапки"	24К	Стельки детские	Способствуют формированию сводов стопы, формируют и закрепляют правильный двигательный стереотип при ходьбе.		2	2	15	46
Стельки ортопедические детские	137	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия у		2,5	2,5	23	34
Стельки ортопедические каркасные детские "Оптима"	11Р	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		2,5	4	18	38
Стельки ортопедические детские	140	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		3	7,5	22	70
Стельки ортопедические каркасные детские	134	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		2	3	17	60

Продолжение приложения А

Инв. № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 3А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические детские	154	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия у		2,5	3	22	34
Стельки ортопедические каркасные детские	153	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		2,5	4	18	40
Стельки ортопедические детские "Топ-Топ"	32К	Стельки детские	Рекомендуются для лечения и профилактики плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2,5	6	22	34
Стельки ортопедические детские	150	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		2,5	7	20	74
Стельки ортопедические детские	151	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		3	7	20	74
Стельки ортопедические детские	138	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		3	7,5	25	72
Стельки ортопедические детские с покрытием из натуральной шерсти "Зима"	51Т	Стельки детские	Для зимней и демисезонной обуви. Эффективно корректируют плоскостопие, вальгусную и плоско-вальгусную установку стоп у детей.		4,5	5,5	24	40

Продолжение приложения А

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические детские "Спорт"	20Е	Стельки детские	Рекомендуется для профилактики плоскостопия у детей. Снижают нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	4	21	46
Стельки ортопедические детские корректирующие "Эффект"	26Е	Стельки детские	Эффективно корректируют деформации стопы, сопровождающиеся боковыми ее отклонениями: варусную или вальгусную деформацию пяточных костей и среднего отдела стопы. Обеспечивают физиологически правильную установку стопы. Могут использоваться при плоскостопии, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп в этапном лечении		2	5	26	60
Стельки ортопедические детские корректирующие "Бейби"	65А	Стельки детские	Эффективно корректируют плоскостопие, а также деформации, сопровождающиеся боковыми ее отклонениями, в том числе вальгусную и плоско-вальгусную		2,5	4	24	77
Стельки ортопедические корректирующие детские "Забота"	18К	Стельки детские	Эффективно корректируют деформации стопы, сопровождающиеся боковыми ее отклонениями: варусную или вальгусную деформацию пяточных костей и среднего отдела стопы. Обеспечивают физиологически правильную установку стопы. Могут использоваться при плоскостопии, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп в этапном лечении		2,5	4,5	27	66

Продолжение приложения А

Взм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПММ INFO@

Лист

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические детские	SB14	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		3,5	6	22	72

Примечания

- 1 Все детские стельки выпускаются в размерном ряде с 11 по 26 размеры.
- 2 Все детские стельки градируются, начиная от базового размера.
- 3 Базовым размером для всех детских стелек служит 18 размер.
- 4 Длина базового размера для детских стелек составляет $182 \text{ мм} \pm 3 \%$.
- 5 При градации длины размерного ряда детских стелек используется значение приращения из диапазона $10 \text{ мм} \pm 20 \%$. В зависимости от назначения изделия, возможно не равномерное приращение размерного ряда внутри артикула, в соответствии с указанным диапазоном приращений.
- 6 Полнота базового размера детских стелек определяется по ГОСТ 3927, в соответствии с 3 половозрастной группой.
- 7 Полнота размеров с 12 по 14 определяется по 1 половозрастной группе; с 15 по 16 определяется по 2 половозрастной группе; с 17 по 20 определяется по 3 половозрастной группе; с 21 по 24 определяется по 4 половозрастной группе; с 25 по 26 определяется по 5 половозрастной группе, в соответствии с ГОСТ 3927.
- 8 Толщина в переднем отделе детских стелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от переднего контура стельки на расстояние 10 мм.
- 9 Значение толщины в переднем отделе стелек определяется с допуском $\pm 0,5 \text{ мм}$.
- 10 Толщина в пяточном отделе детских стелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от заднего контура стельки на расстояние 20 мм.
- 11 Значение толщины в пяточном отделе стелек определяется с допуском $\pm 0,5 \text{ мм}$.
- 12 Высота внутреннего бортика определяется путем измерения расстояния от максимально высокой точки бортика до плоскости опоры (поверхности, на которой расположена стелька). Метод измерения ведется без приложения дополнительных нагрузок на внутренний бортик или изделие целиком.
- 13 Значение высоты внутреннего бортика стелек определяется с допуском $\pm 2 \text{ мм}$.
- 14 Значение массы детских стелек определяется с допуском $\pm 10 \text{ г}$.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Таблица 4А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Полустельки ортопедические детские	135	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28
Полустельки ортопедические детские	155	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28
Полустельки ортопедические детские	156	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28
Полустельки ортопедические детские	SB27	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28

Примечания

- 1 Все детские полустельки выпускаются в размерном ряде с 12 по 26 размеры.
- 2 Все детские полустельки градируются, начиная от базового размера.
- 3 Базовым размером для всех детских полустелек служит 18 размер.
- 4 Длина базового размера для детских полустелек составляет 127 мм $\pm$ 3 %.
- 5 При градации длины размерного ряда детских полустелек используется значение приращения из диапазона 10 мм $\pm$ 20 %. В зависимости от назначения изделия, возможно не равномерное приращение размерного ряда внутри артикула, в соответствии с указанным диапазоном приращений.
- 6 Полнота базового размера детских полустелек определяется по ГОСТ 3927, в соответствии с 3 половозрастной группой.
- 7 Полнота размеров с 12 по 14 определяется по 1 половозрастной группе; с 15 по 16 определяется по 2 половозрастной группе; с 17 по 20 определяется по 3 половозрастной группе; с 21 по 24 определяется по 4 половозрастной группе; с 25 по 26 определяется по 5 половозрастной группе, в соответствии с ГОСТ 3927.
- 8 Толщина в переднем отделе детских полустелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от переднего контура стельки на расстояние 10 мм.
- 9 Значение толщины в переднем отделе полустелек определяется с допуском $\pm$ 0,5 мм.
- 10 Толщина в пяточном отделе детских полустелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от заднего контура стельки на расстояние 20 мм.
- 11 Значение толщины в пяточном отделе полустелек определяется с допуском $\pm$ 0,5 мм.

Продолжение приложения А

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
12 Высота внутреннего бортика определяется путем измерения расстояния от максимально высокой точки бортика до плоскости опоры (поверхности, на которой расположена стелька). Метод измерения ведется без приложения дополнительных нагрузок на внутренний бортник или изделие целиком. 13 Значение высоты внутреннего бортика полустелек определяется с допуском ±2 мм. 14 Значение массы детских полустелек определяется с допуском ±10 г.								

Продолжение приложения А

Примено
По.и-во: 46 (софок иеае) иеае
Ден диктор
М. Б. Деззубов.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Орто-Ник»

Н.Б. Беззубов



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

ЭТИКЕТКА

(Инструкция по применению)

ПОВА.944738.000 ЭТ-03

СТЕЛКИ И ПОЛУСТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

по ТУ 9396-002-77799226-2015

Наименование

Стельки и полустельки ортопедические по ТУ 9396-002-77799226-2015

Варианты исполнений

Наименование изделия	Арт и- кул	Обозначение конструкторского документа
1 Стельки ортопедические для модельной обуви "Ультра"	115	ПОВА.944738.002-001
2 Стельки ортопедические для модельной обуви "Бьюти"	SB10	ПОВА.944738.002-002
3 Стельки ортопедические для модельной обуви "Старс"	101	ПОВА.944738.002-003
4 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко-Грация"	19К	ПОВА.944738.002-004
5 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Мода"	111	ПОВА.944738.002-005
6 Стельки ортопедические "Эко Грация" полнопрофильные для обуви на высоком каблуке	SB03	ПОВА.944738.002-006
7 Стельки ортопедические	03P-2	ПОВА.944738.002-007
8 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко стиль"	78M	ПОВА.944738.002-008
9 Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	125	ПОВА.944738.002-009
10 Стельки ортопедические для модельной обуви "Бьюти"	SB11	ПОВА.944738.002-010
11 Стельки ортопедические полнопрофильные для обуви на высоком каблуке. "Эко стиль"	SB04	ПОВА.944738.002-011
12 Стельки ортопедические для модельной обуви "Старс"	102	ПОВА.944738.002-012
13 Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	126	ПОВА.944738.002-013
14 Стельки ортопедические	SB24	ПОВА.944738.002-014
15 Стельки ортопедические	116	ПОВА.944738.002-015
16 Стельки ортопедические	114	ПОВА.944738.002-016
17 Стельки ортопедические	130	ПОВА.944738.002-017
18 Стельки ортопедические полнопрофильные "ЭВА"	25E	ПОВА.944738.002-018
19 Стельки ортопедические каркасные	108	ПОВА.944738.002-019
20 Стельки ортопедические каркасные	103	ПОВА.944738.002-020
21 Стельки ортопедические лечебно-профилактические	113	ПОВА.944738.002-021
22 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB13	ПОВА.944738.002-022
23 Стельки ортопедические полнопрофильные	17	ПОВА.944738.002-023
24 Стельки ортопедические полнопрофильные "Лада"	83	ПОВА.944738.002-024
25 Стельки ортопедические полнопрофильные "Лада"	87	ПОВА.944738.002-025
26 Стельки ортопедические лечебно-профилактические. "Спорт"	30E	ПОВА.944738.002-026
27 Стельки ортопедические каркасные	54	ПОВА.944738.002-027
28 Стельки ортопедические каркасные	106	ПОВА.944738.002-028
29 Стельки ортопедические лечебно-профилактические. "Зима"	31E	ПОВА.944738.002-029
30 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB12	ПОВА.944738.002-030
31 Стельки ортопедические полнопрофильные	104	ПОВА.944738.002-031
32 Стельки ортопедические каркасные	45	ПОВА.944738.002-032
33 Стельки ортопедические "АНТИШПОРА"	93	ПОВА.944738.002-033
34 Стельки ортопедические	131	ПОВА.944738.002-034
35 Стельки ортопедические мягкие "Софт"	68	ПОВА.944738.002-035
36 Стельки лечебно-профилактические	142	ПОВА.944738.002-036
37 Стельки ортопедические с высокими бортиками	SB23	ПОВА.944738.002-037
38 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB21	ПОВА.944738.002-038
39 Стельки лечебно-профилактические	122	ПОВА.944738.002-039
40 Стельки лечебно-профилактические массажные	89	ПОВА.944738.002-040
41 Стельки ортопедические каркасные	SB08	ПОВА.944738.002-041
42 Стельки ортопедические	112	ПОВА.944738.002-042
43 Стельки мягкие ортопедические	SB09	ПОВА.944738.002-043
44 Стельки лечебно-профилактические	100	ПОВА.944738.002-044

45 Стельки ортопедические разгружающие. "Диабетические"	Д2-2	ПОВА.944738.002-045
46 Стельки ортопедические	SB19	ПОВА.944738.002-046
47 Стельки ортопедические мягкие	76	ПОВА.944738.002-047
48 Стельки лечебно-профилактические	139	ПОВА.944738.002-048
49 Стельки ортопедические лечебно-профилактические "Арми"	97	ПОВА.944738.002-049
50 Стельки ортопедические разгружающие "Элит" с эффектом памяти	Д3-2	ПОВА.944738.002-050
51 Стельки ортопедические "Индивидуальные"	53И	ПОВА.944738.002-051
52 Стельки ортопедические каркасные "ЭЛИТ"	29К	ПОВА.944738.002-052
53 Стельки ортопедические каркасные	90	ПОВА.944738.002-053
54 Стельки ортопедические с покрытием из натуральной шерсти "Элит зима"	50Т	ПОВА.944738.002-054
55 Стельки ортопедические с высокими бортиками	88	ПОВА.944738.002-055
56 Стельки ортопедические для уменьшения нагрузки на позвоночник	SB18	ПОВА.944738.002-056
57 Стельки лечебно-профилактические	141	ПОВА.944738.002-057
58 Стельки ортопедические с высокими бортиками "Бейс"	77	ПОВА.944738.002-058
59 Стельки ортопедические для уменьшения нагрузки на позвоночник	107	ПОВА.944738.002-059
60 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB22	ПОВА.944738.002-060
61 Стельки ортопедические мягкие "Комфорт"	38К	ПОВА.944738.002-061
62 Стельки ортопедические полнопрофильные	105	ПОВА.944738.002-062
63 Стельки ортопедические	SB25	ПОВА.944738.002-063
64 Стельки ортопедические, каркасные. "Оптима"	10Р	ПОВА.944738.002-064
65 Стельки гелевые с биомагнитным воздействием.	85	ПОВА.944738.002-065
66 Стельки лечебно-профилактические	146	ПОВА.944738.002-066
67 Стельки ортопедические мягкие с покрытием из натуральной овечьей шерсти "зимний Комфорт"	38Т	ПОВА.944738.002-067
68 Стельки ортопедические с покрытием из натурального меха. "Зимний уют"	22Т	ПОВА.944738.002-068
69 Стельки ортопедические разгружающие "Микс"	110М	ПОВА.944738.002-069
70 Стельки лечебно-профилактические	96	ПОВА.944738.002-070
71 Стельки лечебно-профилактические	86	ПОВА.944738.002-071
72 Стельки ортопедические мягкие с покрытием из натуральной овечьей шерсти	74	ПОВА.944738.002-072
73 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко лайт"	SB02	ПОВА.944738.002-073
74 Стельки ортопедические полнопрофильные	SB20	ПОВА.944738.002-074
75 Стельки ортопедические каркасные "VICTORY - HIGH"	99	ПОВА.944738.002-075
76 Стельки ортопедические лечебно-профилактические для водителей "Драйвер"	94	ПОВА.944738.002-076
77 Стельки ортопедические для разгрузки коленных суставов "Флекс"	57	ПОВА.944738.002-077
78 Стельки лечебно-профилактические	143	ПОВА.944738.002-078
79 Стельки лечебно-профилактические	147	ПОВА.944738.002-079
80 Стельки ортопедические с зонами разгрузки "Комби"	SB07	ПОВА.944738.002-080
81 Стельки лечебно-профилактические	81	ПОВА.944738.002-081
82 Стельки ортопедические каркасные "Актив"	55А	ПОВА.944738.002-082
83 Стельки лечебно-профилактические	127	ПОВА.944738.002-083
84 Стельки лечебно-профилактические	79	ПОВА.944738.002-084
85 Стельки ортопедические полнопрофильные "Бабочка"	95	ПОВА.944738.002-085

86 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко лайт"	82М	ПОВА.944738.002-086
87 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко"	59К	ПОВА.944738.002-087
88 Стельки лечебно-профилактические	144	ПОВА.944738.002-088
89 Стельки ортопедические "ЭКО-натура"	98	ПОВА.944738.002-089
90 Стельки ортопедические каркасные "Польза"	49К	ПОВА.944738.002-090
91 Стельки ортопедические каркасные с вентилируемым покрытием "Бриз"	67	ПОВА.944738.002-091
92 Стельки лечебно-профилактические	148	ПОВА.944738.002-092
93 Стельки ортопедические лечебно-профилактические для спортивной обуви "Терм"	109	ПОВА.944738.002-093
94 Стельки ортопедические силиконовые	84	ПОВА.944738.002-094
95 Стельки лечебно-профилактические	128	ПОВА.944738.002-095
96 Стельки ортопедические	92	ПОВА.944738.002-096
97 Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко"	SB01	ПОВА.944738.002-097
98 Стельки ортопедические полнопрофильные	80Н	ПОВА.944738.002-098
99 Стельки ортопедические полнопрофильные "VICTORY"	23К	ПОВА.944738.002-099
100 Стельки ортопедические полнопрофильные "VICTORY - ANTISHOCK"	69	ПОВА.944738.002-100
101 Стельки ортопедические полнопрофильные	117	ПОВА.944738.002-101
102 Стельки лечебно-профилактические	145	ПОВА.944738.002-102
103 Стельки лечебно-профилактические	129	ПОВА.944738.002-103
104 Стельки лечебно-профилактические	149	ПОВА.944738.002-104
105 Полустельки ортопедические "Блейд"	121	ПОВА.944738.003-001
106 Стельки лечебно-профилактические прозрачные для модельной обуви	209С	ПОВА.944738.003-002
107 Полустельки ортопедические для использования в модельной обуви с высотой каблука до 7см.	66К	ПОВА.944738.003-003
108 Стельки ортопедические силиконовые $\frac{3}{4}$ "Ароматизированные"	75С	ПОВА.944738.003-004
109 Полустельки ортопедические "Модельные"	27М	ПОВА.944738.003-005
110 Полустельки ортопедические	71В	ПОВА.944738.003-006
111 Полустельки лечебно- профилактические с изменяемой шириной пятки "Вариант"	119	ПОВА.944738.003-007
112 Полустельки ортопедические	SB26	ПОВА.944738.003-008
113 Стельки лечебно-профилактические для модельной обуви	217С	ПОВА.944738.003-009
114 Полустельки ортопедические "Модельные лайт"	60К	ПОВА.944738.003-010
115 Полустельки ортопедические каркасные "Оптима лайт"	64К	ПОВА.944738.003-011
116 Полустельки ортопедические каркасные "Оптима"	09Р	ПОВА.944738.003-012
117 Полустельки ортопедические для модельной обуви "Подיום"	73К	ПОВА.944738.003-013
118 Полустельки ортопедические силиконовые	120	ПОВА.944738.003-014
119 Стельки ортопедические $\frac{3}{4}$	124	ПОВА.944738.003-015
120 Полустельки мягкие ортопедические "Комфорт лайт"	72К	ПОВА.944738.003-016
121 Стельки ортопедические $\frac{3}{4}$	91	ПОВА.944738.003-017
122 Полустельки ортопедические "Стиль"	118	ПОВА.944738.003-018
123 Стельки лечебно-профилактические детские	136	ПОВА.944738.004-001
124 Стельки ортопедические каркасные детские	152	ПОВА.944738.004-002
125 Стельки лечебно-профилактические детские	133	ПОВА.944738.004-003
126 Стельки ортопедические корректирующие детские "Косолапки"	24К	ПОВА.944738.004-004
127 Стельки ортопедические детские	137	ПОВА.944738.004-005
128 Стельки ортопедические каркасные детские "Оптима"	11Р	ПОВА.944738.004-006
129 Стельки ортопедические детские	140	ПОВА.944738.004-007
130 Стельки ортопедические каркасные детские	134	ПОВА.944738.004-008

131 Стельки ортопедические детские	154	ПОВА.944738.004-009
132 Стельки ортопедические каркасные детские	153	ПОВА.944738.004-010
133 Стельки ортопедические детские "Топ-Топ"	32К	ПОВА.944738.004-011
134 Стельки ортопедические детские	150	ПОВА.944738.004-012
135 Стельки ортопедические детские	151	ПОВА.944738.004-013
136 Стельки ортопедические детские	138	ПОВА.944738.004-014
137 Стельки ортопедические детские с покрытием из натуральной шерсти "Зима"	51Т	ПОВА.944738.004-015
138 Стельки ортопедические каркасные детские	SB17	ПОВА.944738.004-016
139 Стельки ортопедические каркасные детские	SB16	ПОВА.944738.004-017
140 Стельки ортопедические корректирующие детские "Эффект плюс"	58П	ПОВА.944738.004-018
141 Стельки ортопедические каркасные детские	132	ПОВА.944738.004-019
142 Стельки ортопедические детские корректирующие "Бейби"	SB05	ПОВА.944738.004-020
143 Стельки лечебно-профилактические детские	123	ПОВА.944738.004-021
144 Стельки лечебно-профилактические детские "Спорт"	20Е	ПОВА.944738.004-022
145 Стельки ортопедические детские корректирующие "Эффект"	26Е	ПОВА.944738.004-023
146 Стельки ортопедические детские корректирующие "Бейби"	65А	ПОВА.944738.004-024
147 Стельки ортопедические корректирующие детские "Забота"	18К	ПОВА.944738.004-025
148 Стельки ортопедические детские	SB15	ПОВА.944738.004-026
149 Стельки ортопедические детские "Медиум"	56Е	ПОВА.944738.004-027
150 Стельки ортопедические детские	SB14	ПОВА.944738.004-028
151 Полустельки ортопедические детские	135	ПОВА.944738.005-001
152 Полустельки ортопедические детские	155	ПОВА.944738.005-002
153 Полустельки ортопедические детские	156	ПОВА.944738.005-003
154 Полустельки ортопедические детские	SB27	ПОВА.944738.005-004

Эксплуатационный документ распространяется на следующие артикулы:

71В	120	148
75С	124	149
79	127	209С
81	128	217С
84	129	SB07
85	138	SB09
86	139	SB14
91	141	SB15
93	142	SB18
107	143	SB19
109	144	SB24
110	145	SB25
113	146	Д2-2
118	147	Д3-2

Назначение:

Стельки и полустельки предназначены для лечения и профилактики заболеваний стопы, а также для создания комфортных условий пользователям, которые имеют различного рода деформацию стопы.

Стельки и полустельки предназначены для индивидуального использования.

Технические характеристики

При изготовлении стелек и полустелек должны быть использованы материалы, указанные в таблице

Название материала и красителей	Фирма-изготовитель, страна или нормативный документ
Кожа компрессионная регенерированная (кожаная стружка, латекс), арт. Special NSS	Алькор, Италия
Искусственная кожа Поливинилхлорид (ПВХ пленка). Артикул Lai-porellina	Sisa, Италия
Подкладочный материал Microliner полиэстер/полиамид	Huzhou Forince Textile CO.LTD, Китай
Подкладочный материал ST1304 NP silbe полиамид	Twe group Германия
Драйсол стелечный материал Вискоза/Полиамид/Полиэстр	Twe group Германия
Подкладочный материал арт. SC 1350N 044 (bedun) 60% Latex, 40% Polyester	Quanzhou Hengdali Import and export Китай
Материал Неоперн 100% бутадиен-стирольный каучук	Chuan Hui int, Китай
Подкладочный материал Line Kappa100% вспененный ПВХ	Twe group Германия
Материал Спайдер12%вискозы88%бутадиенстирольный каучук	Zahonero, Испания
Ортофом «Primacell» Вспененный пенополиэтилен 100%	Голион, Франция
Материал Мемори Фоам вспененный латекс, полиэстер	Emsold, Германия
Лента 8160 PET 12 акриловый клей на полиэфирном носителе	Свифт Кемикал, Италия
Материал Параскин полиэтилентерефталат/полипропен/	Twe group, Германия
Материал Ноу слип DOP - 20% PVC- 30% CaCo3 - 30%	Changie Ypuyan Textile, Китай
Термопласт смесь из тенополимера на основе полиэстера/полиуретан. Артикулы : Biorel 08, Relion 015, Relion 020	Technogy, Италия
Резинка для брителей полиэстер/ латекс	Веллеткс, Китай
Микропласт PA-MICROPLAST 25443-00 100% полиамид.	Мираль, Германия
Силикон Ecoflex 030, Silimold АКР 08 (силикон медицинский)	Алькор, Италия
Скотч двухсторонний ПВХ Поливинилхлорид	Foshan City Nanhai Zemu Xiang Adhesive Pcts., Ltd. Китай
Интерлок трикотажное х/б полотно	Ресстекс, Турция
Микрофибра Vermont and Versales Crudo (нейлон 60 %, полиуретан 40%)	Tejidos Roca, Испания
Материал НО грип (бутадиен- стирильного каучука с вискозной тканью - 100%)	Zahonero, Испания
Материал Пенка (пенополиуретан)	Aureright, Китай
Материал Borreguillo(20% полиэстер,80% бутадиен-стирольный каучук)	Zahonero, Испания
Вкладные элементы(амортизаторы, валики): вспененный латекс. Carbosan	Emsold, Германия
Материал Sharc 1 (полиамид-91%, полиэстер-4%, серебряная нить - 5%)	Vegam, Италия
KEVLAR 80 LOGO Поливинилхлорид (ПВХ пленка)	Coronet SPA, Италия
Ламинированный текстильный материал 50% силикона, 50% хлопка, арт. HSTA5050E-2828-480	Hong Yang Textile, Китай
Намагнитченная резина «постоянный магнит» (винил, ферритный порошок Sr 0.6 Fe 203)	AIC Magnetics Ltd., Китай
Эластичная лента 70%полээфир 30%латекс	ОСТ Р 17-10-883-93, ООО Производственная компания Ультратекс
Креатекс шерсть 80% овечий пух/ 20%ПЭ	ТУ 8390-001-57904514-2013, ОАО Фанема
Спилок-велюр вид натурального кожевенного материала	ТУ 17-06-95-84 . ОАО Русская Кожа.Рязань
Полотно полиэфирное, Артикул 200	ТУ 8397-016-22739674-2014,

	ОАО Предприятие Нетканых Материалов
Иглопробивной материал полиэфирное полотно, Артикул СЗ/ЗЛ	ТУ 8397-030-00300297-2007, ОАО Термопласт
Нитки лавсановые 45ЛЛ армированные с полиэфирной оплёткой	ГОСТ 6309-93, ОАО «ПНК ИМ КИРОВА»
Лист пенополителена ППЭ 1П	ТУ 2246-01-10489953-98, ООО ЭТИОЛ
Кожи (крупнорогатого скота) Артикул КРС (0,9-1,1мм)	ГОСТ 940-81, ГОСТ 1838-91, ОАО Вахруши ЮФть
Пенополиэтилен ППЭ-2М, ППЭ-3М	ТУ 2246-001-10489953-98, ООО Этиол
Изолон ПСЭВ	ТУ 2244-013-00203476 ОАО Ижевский завод пластмасс
Пеносевилен СЭВ-1, СЭВ-2, СЭВ-3	ТУ 55 221 1350 ,ООО Этиол
Пласты коры пробкового дуба, плиты прессованные из пробковой крошки.Артикул 1/75	Vega Industries, Испания
Пластмасса ПЭТ (полиэтилен) Артикул Пластик А-ПЭТ Novattro 2x1250x2050 мм прозрачный, Пластик А-ПЭТ Novattro 0,5x1250x2050 мм прозрачный	ТУ 2246-010-81057157-2014 ООО "СафПласт"
Лента велкро полиамид	ТУ 17-15-14-90. ОАО Лента. Беларусь
ЭВА (пластины пористые эвапласт этиленвинилацетат)	СТО 8741-016-00300209-2014 ОАО Искож и ООО Экопром
Искусственный нубук (полиэстер), Артикул эксперт 1.2	Lifli Rulo ve Levha San,Турция
Полиуретановый гель (8118М48-А; 220М19-В)	Jinsheng Industrial Co.,Ltd. Китай
Каркасы из полипропилена 30 марки	ТУ 2211-001-76332549 ООО Сурсил
Краситель Solvent Blue 104 (синий), Solvent Red 135 (красный), Solvent Yellow 114 (жёлтый)	Huzhou Forince Textile CO.LTD,Китай
Краситель Luconyl	Zahonero, Испания
Концентрат "БАСКО"6 (Перламутровый)	ООО «Этиол», г. Владимир
Краситель П 514	ОАО «Искож», г. Киров
Краситель GHS Beige nylon GN08 (бежевый)	Chuan Hui int, Китай
Краситель Silc PIG (0.11) (зелёный)	Jinsheng Industrial Co.,Ltd. Китай

Основные характеристики стелек и полустелек см. Приложение А

Жесткие детали из термопластичных и влагоотверждаемых материалов должны изготавливаться в сочетании со смягчающе-разгружающим слоем толщиной не более 5 мм.

Стельки и полустельки должны состоять из следующих деталей: верхнего покрытия, нижнего покрытия (при необходимости) и межстелечного слоя.

Межстелечный слой должен изготавливаться цельноформованным (однослойным) или наборным (многослойным).

Межстелечный слой может быть выполнен в виде выкладки внутреннего продольного свода, выкладки внутреннего и наружного продольного сводов, выкладки поперечного свода.

Наружные края стелек и полустелек должны быть обработаны в обрезку и должны иметь чистый без выхватов срез.

В наружных краях стелек и полустелек с использованием термопластичных материалов допускается обработка жестких деталей в обрезку.

Склеенные между собой детали стелек и полустелек должны плотно прилегать друг к другу без видимого зазора.

Стельки и полустельки должны быть без морщин, пятен, загрязнений, следов клея, механических повреждений, местных отслоений деталей.

Стельки и полустельки должны быть устойчивы к санитарной обработке, состоящей из протирания теплым мыльным раствором с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С, протирания водой с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С и сушки.

Стельки и полустельки должны быть устойчивы к агрессивным биологическим жидкостям (пот).

Стельки гелевые с биомагнитным воздействием должны иметь на верхней поверхности стельки величину магнитной индукции (40 ± 15) мТл.

Стельки и полустельки должны быть сохранять свои свойства в рабочих климатических условиях, которые соответствуют УЗ.1, УХЛЗ.1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 20 до плюс 40°С.

Стельки и полустельки, упакованные в транспортную тару, должны быть устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании и соответствующим указанным в ГОСТ Р 50444 для условий транспортирования.

Средний срок службы стелек и полустелек до списания должен быть не менее 6 месяцев. Средний срок хранения стелек (артикулов 84,209С, 75С, 217С, 120) при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей должен быть не менее 24 месяцев, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 48 месяцев

По возможным последствиям отказа в процессе эксплуатации стельки и полустельки относятся к классу Г по РД 50-707.

По потенциальному риску применения стельки и полустельки относятся к классу 1.

Номенклатурное обозначение стелек и полустелек – 250260.

Внешний вид базовых образцов



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Показания к применению – см. Приложение А

Противопоказания – переломы стоп, открытые раны на подошвенной поверхности стоп, индивидуальная непереносимость, необходимо проконсультироваться с врачом.

Возможные побочные действия – нет.

Транспортирование и хранение

Стельки и полустельки могут перевозиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением требований, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования стелек и полустелек должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Хранение стелек и полустелек у изготовителя должно осуществляться в транспортной упаковке с соблюдением условий хранения при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей.

Указания по эксплуатации

При эксплуатации стелек и полустелек должны соблюдаться указания, помещенные в этикетке.

Указания по утилизации

Материалы, из которых изготовлены стельки и полустельки, являются безопасными для человека и окружающей среды.

Стельки и полустельки после их использования могут быть утилизированы как бытовой мусор класса опасности А.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие стелек и полустелек требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок использования стелек и полустелек (артикулов 84 209С, 75С, 217С, 120) – 2 месяца, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 6 месяцев.

Срок гарантии устанавливается со времени выдачи стелек и полустелек или их продажи согласно копии товарного чека.

В течение гарантийного срока в случае выявления производственного дефекта и (или) несоответствия медицинским показаниям предприятие-изготовитель производит ремонт или изготовление стелек и полустелек бесплатно.

Гарантийный срок хранения стелек и полустелек (артикулов 84 209С, 75С, 217С, 120) – 12 месяцев со дня изготовления, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 36 месяцев

Дата изготовления указана на упаковке.

Количество- штук.

Артикул: №.....

ТУ 9396-002-77799226-2015

Изготовитель:

ООО «Орто.Ник»

Адрес места нахождения: 194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д.3, литер Л, помещение 1-Н, комната 125;

e-mail: stelki@mail.ru; ИНН 7810043090

тел. (812) 677-46-47

Претензии потребителей принимаются Изготовителем.

Приёмка

Стельки и полустельки приняты ОТК фирмы ООО
и соответствуют требованиям ТУ 9396-002-77799226-2015

Подпись

Штамп ОТК

Инв.№ подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические	116	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	6	25	70
Стельки ортопедические	114	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	6	25	70
Стельки ортопедические	130	Стельки взрослые	Рекомендуются для профилактики и лечения продольного и поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе. Предназначены для зимней и демисезонной обуви.		2,5	8	22	66
Стельки ортопедические полнопрофильные "ЭВА"	25Е	Стельки взрослые	Рекомендуется для коррекции продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		1,5	6	27	70

Продолжение приложения А

					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические каркасные	108	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	7	25	80
Стельки ортопедические каркасные	103	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2,5	8,5	22	60
Стельки ортопедические лечебно-профилактические	113	Стельки взрослые	Рекомендуются для снижения нагрузки на стопу и создания комфорта при ходьбе.		3	4	21	64
Стельки ортопедические полнопрофильные	SB13	Стельки взрослые	Рекомендуется для коррекции продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		1,5	4	27	70

Продолжение приложения А

					Лист
Взм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические полнопрофильные	17	Стельки взрослые	Рекомендуется для коррекции продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		1,5	6	27	70
Стельки ортопедические полнопрофильные "Лада"	83	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		2	2	32	98
Стельки ортопедические полнопрофильные "Лада"	87	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		2	2	32	98
Стельки ортопедические лечебно-профилактические. "Спорт"	30Е	Стельки взрослые	Рекомендуются для спортивной и повседневной обуви. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	4	25	64
Стельки ортопедические каркасные	54	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	7	25	79

Продолжение приложения А

[illegible]

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические каркасные	45	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	7	25	75
Стельки ортопедические "АНТИШПОРА"	93	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики пяточных шпор, болезни Шинца, болей в пятке различного происхождения.		2,5	5	25	75
Стельки ортопедические	131	Стельки взрослые	Рекомендуются для профилактики и лечения продольного и поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе. Предназначены для зимней и демисезонной обуви.		2,5	8	22	66
Стельки ортопедические мягкие "Софт"	68	Стельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном). Могут использоваться в модельной, спортивной и повседневной обуви		3	5,5	9	56
Стельки лечебно-профилактические	142	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на стопу.		3	6	19	61

Продолжение приложения А

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические каркасные	SB08	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	7	25	75
Стельки ортопедические	112	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		2	9	25	70
Стельки мягкие ортопедические	SB09	Стельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном). Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		2,5	2,5	11	72
Стельки лечебно-профилактические	100	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		3	4	15	70

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

					Лист	
Взм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические разгружающие "Элит" с эффектом памяти	ДЗ-2	Стельки взрослые	Рекомендуются для снижения нагрузки на стопу: в повседневной и спортивной обуви для комфорта и профилактики перегрузки стопы, а также при многих ортопедических проблемах: продольное и поперечное плоскостопие (фиксированные или частично фиксированные деформации); деформация стопы при ревматоидном полиартрите, подагре; синдроме "диабетической стопы"; нейро- и ангиопатии различной		4,5	6	22	82
Стельки ортопедические "Индивидуальные"	53И	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики различных видов плоскостопия и других деформаций стопы, создание комфорта при ходьбе. Конструкция стелек позволяет учесть все		2	4	24	86
Стельки ортопедические каркасные "ЭЛИТ"	29К	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2	7	25	77

Продолжение приложения А

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические каркасные	90	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		2,5	7	27	90
Стельки ортопедические с покрытием из натуральной шерсти "элит зима"	50Т	Стельки взрослые	Рекомендуются для профилактики и лечения продольного и поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе. Предназначены для зимней и демисезонной обуви.		2,5	8	22	64
Стельки ортопедические с высокими бортиками	88	Стельки взрослые	Рекомендуется использовать для реабилитации после всех типов переломов лодыжек и костей стопы; после травм и операций в области стопы и голеностопного сустава; при деформациях и нестабильность голеностопного сустава, нарушении тонуса мышц стопы и голени коррекция нефиксированных деформаций стоп, в том числе у подростков. Также могут использоваться в специальной обуви (коньки, ролики и т.п.), в ортопедической обуви для		3	3	41	101
Стельки ортопедические для уменьшения нагрузки на позвоночник	SB18	Стельки взрослые	Рекомендуются при повышенных нагрузках на опорно-двигательный аппарат.		3	4	20	82

Продолжение приложения А

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дл

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические	141	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на		3	6	19	58
Стельки ортопедические с высокими бортиками "Бейс"	77	Стельки взрослые	Рекомендуется использовать для реабилитации после всех типов переломов лодыжек и костей стопы; после травм и операций в области стопы и голеностопного сустава; при деформациях и нестабильность голеностопного сустава, нарушении тонуса мышц стопы и голени коррекция нефиксированных деформаций стоп, в том числе у подростков. Также могут использоваться в специальной обуви (коньки, ролики и т.п.), в ортопедической обуви для		4	3	41	114
Стельки ортопедические для уменьшения нагрузки на позвоночник	107	Стельки взрослые	Рекомендуются при повышенных нагрузках на опорно-двигательный аппарат.		4,5	6	22	90
Стельки ортопедические полнопрофильные	SB22	Стельки взрослые	Лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, разгрузки переднего отдела стопы, снятия усталости и боли в ногах.		2	2	32	98
Стельки ортопедические мягкие "Комфорт"	38K	Стельки взрослые	Рекомендуются как профилактические стельки а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном). Могут использоваться в модельной, спортивной и повседневной обуви		2,5	2,5	11	72

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические полнопрофильные "Эко лайт"	SB02	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Снимают боли в ногах, эффективно разгружают передний отдел стопы.		2	3	25	104
Стельки ортопедические полнопрофильные	SB20	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения поперечного и комбинированного плоскостопия, деформирующего артроза суставов пальцев стопы. Эффективно снимают боли в ногах, разгружают передний отдел стопы.		2,5	2,5	25	114
Стельки ортопедические каркасные "VICTORY - HIGH "	99	Стельки взрослые	Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		2,5	8	22	60
Стельки ортопедические лечебно-профилактические для водителей "Драйвер"	94	Стельки взрослые	Снижают утомляемость ног при вождении автомобиля.		3	3	17	102
Стельки ортопедические для разгрузки коленных суставов "Флекс"	57	Стельки взрослые	Рекомендуются для разгрузки коленных суставов, а также для коррекции варусной установки стоп.		3	3	24	118
Стельки лечебно-профилактические	143	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на стопу.		3	6	19	64

Продолжение приложения А

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические	147	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		3,5	5	15	68
Стельки ортопедические с зонами разгрузки "Комби"	SB07	Стельки взрослые	Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и		4	5	25	72
Стельки лечебно-профилактические	81	Стельки взрослые	Бережно поддерживают своды стопы; уменьшают нагрузку на суставы; разгружают передний отдел стопы; оказывают точечное воздействие на стопу, улучшая кровообращение.		4	7	4	58
Стельки ортопедические каркасные "Актив"	55A	Стельки взрослые	Рекомендуется для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Применяются в спортивной, повседневной и летней обуви, а также при повышенной потливости		4	8	24	72
Стельки лечебно-профилактические	127	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	10	18	76
Стельки лечебно-профилактические	79	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе.		4,5	4,5	4,5	55
Стельки ортопедические полнопрофильные "Бабочка"	95	Стельки взрослые	Рекомендуется для лечения поперечного и комбинированного плоскостопия, деформирующего артроза суставов пальцев стопы. Эффективно снимают боли в ногах, разгружают передний отдел стопы.		2	2,5	25	116

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Продолжение приложения А

[illegible]

 ООО ЦПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Инв. № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические	148	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	6	18	71
Стельки ортопедические лечебно-профилактические для спортивной обуви "Терм"	109	Стельки взрослые	Снимает усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник. Обладают антибактериальным эффектом		4	7	22	58
Стельки ортопедические силиконовые	84	Стельки взрослые	Поперечное плоскостопие I-II степени, продольное плоскостопие I-II степени, комбинированное плоскостопие, пяточная шпора, натоптыши под головками плюсневых костей и на кончиках пальцев стопы, вальгусная деформация стоп. Боли в подошвенной части стопы, связанные с артрозом суставов стоп, плоскостопием, пяточной шпорой и трофическими расстройствами. Эндартериит и атеросклероз суставов нижних конечностей.		4	7	22	140
Стельки лечебно-профилактические	128	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	10	18	80
Стельки ортопедические	92	Стельки взрослые	Профилактика и лечение продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Применяется при варикозной болезни, болях и отеках ног; интенсивной нагрузки на ноги и длительного ношения обуви; повышенное потоотделение ног,		4	10	28	82

Продолжение приложения А

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки лечебно-профилактические	145	Стельки взрослые	Рекомендуются использовать при занятии спортом, для создания комфорта и снижения нагрузки на		3	6	19	70
Стельки лечебно-профилактические	129	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4	10	26	85
Стельки лечебно-профилактические	149	Стельки взрослые	Рекомендуются для создания комфорта при ходьбе, снижения нагрузки на стопу.		4,5	6,5	18	74

- 1 Все взрослые стельки выпускаются в размерном ряде с 34 по 48 размеры.
- 2 Все взрослые стельки градируются, начиная от базового размера.
- 3 Базовым размером для всех взрослых стелек и полустелек служит 39 размер.
- 4 Длина базового размера для взрослых стелек составляет $253 \text{ мм} \pm 3 \%$.
- 5 При градации длины размерного ряда взрослых стелек используется значение приращения из диапазона $7,5 \text{ мм} \pm 35 \%$. В зависимости от назначения изделия, возможно не равномерное приращение размерного ряда внутри артикула, в соответствии с указанным диапазоном приращений.
- 6 Полнота базового размера взрослых стелек определяется по ГОСТ 3927, в соответствии с 8 половозрастной группой.
- 7 Полнота размеров с 34 по 40 определяется по 8 половозрастной группе; с 41 по 48 определяется по 9 половозрастной группе в соответствии с ГОСТ 3927.
- 8 Толщина в переднем отделе взрослых стелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от переднего контура стельки на расстояние 10 мм.
- 9 Значение толщины в переднем отделе стелек определяется с допуском $\pm 0,5 \text{ мм}$.
- 10 Толщина в пяточном отделе взрослых стелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от заднего контура стельки на расстояние 30 мм.
- 11 Значение толщины в пяточном отделе стелек определяется с допуском $\pm 0,5 \text{ мм}$.
- 12 Высота внутреннего бортика определяется путем измерения расстояния от максимально высокой точки бортика до плоскости опоры (поверхности, на которой расположена стелька). Метод измерения ведется без приложения дополнительных нагрузок на внутренний бортик или изделие целиком.
- 13 Значение высоты внутреннего бортика стелек определяется с допуском $\pm 2 \text{ мм}$.
- 14 Значение массы взрослых стелек определяется с допуском $\pm 10 \text{ г}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Полустельки ортопедические "Блейд"	121	Полустельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степени. Снимают усталость и боли в ногах, повышают комфортность обуви.		1	1	24	48
Стельки лечебно-профилактические прозрачные для модельной обуви	209С	Полустельки взрослые	Рекомендуются при болезненных ощущениях и повышенной утомляемости при ходьбе на высоких каблуках		1,5	3,5	3,5	38
Полустельки ортопедические для использования в модельной обуви с высотой каблука до 7см.	66К	Полустельки взрослые	Эффективно защищает ноги от усталости, снимает статические боли в переднем отделе стопы, предотвращают рост "косточек", развитие "Hallux valgus". Применяются также для профилактики и лечения		2	2	2	34
Стельки ортопедические силиконовые 3/4 "Ароматизированные"	75С	Полустельки взрослые	Снижают ударные нагрузки при ходьбе, повышает комфортность обуви, разгружают головки плюсневых костей, мягко поддерживает поперечный свод		2	2	2	58
Полустельки ортопедические "Модельные"	27М	Полустельки взрослые	Рекомендуется для лечения и профилактики поперечного плоскостопия, создание комфорта при ходьбе в обуви с высоким каблуком. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на передний отдел стопы.		2,5	1	1	28


WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Продолжение приложения А

[illegible]

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Инв.№ подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 3А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Стельки ортопедические детские	SB15	Стельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		3	5	27	72
Стельки ортопедические детские "Медиум"	56E		Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.		3	7,5	21	72

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.				
Лист				
№ докум.				
Подп.				
Дата				

Таблица 4А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Показания к применению	Характеристики				
					Толщина в переднем отделе, мм	Толщина в пяточном отделе, мм	Высота внутреннего бортика, мм	Масса, г
Полустельки ортопедические детские	135	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28
Полустельки ортопедические детские	155	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28
Полустельки ортопедические детские	156	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28
Полустельки ортопедические детские	SB27	Полустельки детские	Рекомендуется для коррекции плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп у детей.		1	4	18	28

Примечания

1 Все детские полустельки выпускаются в размерном ряде с 12 по 26 размеры.

2 Все детские полустельки градируются, начиная от базового размера.

3 Базовым размером для всех детских полустелек служит 18 размер.

4 Длина базового размера для детских полустелек составляет 127 мм ± 3 %.

5 При градации длины размерного ряда детских полустелек используется значение приращения из диапазона 10 мм ± 20 %. В зависимости от назначения изделия, возможно не равномерное приращение размерного ряда внутри артикула, в соответствии с указанным диапазоном приращений.

6 Полнота базового размера детских полустелек определяется по ГОСТ 3927, в соответствии с 3 половозрастной группой.

7 Полнота размеров с 12 по 14 определяется по 1 половозрастной группе; с 15 по 16 определяется по 2 половозрастной группе; с 17 по 20 определяется по 3 половозрастной группе; с 21 по 24 определяется по 4 половозрастной группе; с 25 по 26 определяется по 5 половозрастной группе, в соответствии с ГОСТ 3927.

8 Толщина в переднем отделе детских полустелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от переднего контура стельки на расстояние 10 мм.

9 Значение толщины в переднем отделе полустелек определяется с допуском ±0,5 мм.

10 Толщина в пяточном отделе детских полустелек замеряется вдоль осевой линии стельки, в точке, удаленной от заднего контура стельки на расстояние 20 мм.

11 Значение толщины в пяточном отделе полустелек определяется с допуском ±0,5 мм.

Продолжение приложения А

Примечание:

Кан. 60: (всего 402)

Дел. 100000

Н. В. Беззубов

