

서울 서초구 서초대로49길 5, 501호
(서초동 1716-7, 송보빌딩)
[별지 제41호서식]

공증인가
법무법인

도시 

(전화) 02-2183-0686
(팩스) 02-2183-0690

Registered No. 2024 - 2131

NOTARIAL CERTIFICATE

DOSI LAW FIRM

#501, 5, Seocho-daero 49-gil,
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea



mm X 297mm
보관용지(1종) 70g/m²

Instruction for Use

To. Roszdravnadzor

We, Osstem Implant Co., Ltd. hereby declare that Instruction for Use provided to the Roszdravnadzor is complete, consistent and authentic.

**Osstem Implant Co., Ltd.
Position : President
Name : Kim Hae Sung**

as ki



Osstem, Samsung-ro 512beon, gil, Haeundae-gu, Busan

OSSTEM IMPLANT Co., Ltd

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

« Компоненты для установки стоматологических имплантов TS»

1. Название медицинского оборудования

Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

2. Информация о производителе медицинского оборудования (название, месторасположение, почтовый адрес, телефон, адрес производственного объекта)

2.1. Официальный производитель

Osstem Implant Co., Ltd. (Осстем Имплант Ко., Лтд.)

66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 48002, Korea (Республика Корея)

Тел. +82 70 4394 9632; факс +82 51 861 4693.

2.2. Производственная площадка

Osstem Implant Co., Ltd., Haeundae plant, 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 48002, Korea

2.3. Уполномоченный представитель в России

ООО «ОССТЕМ»

115432 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, д. 18, кор. 7, помещение 1Е/13

3. Назначение медицинского оборудования

Изделия предназначены для использования со стоматологическими имплантатами для обеспечения поддержки реставрационных конструкций, таких как коронки, мосты или съемные зубные протезы.

Система имплантатов компании «Osstem» была разработана для операции имплантации зубов; имплантат помещается на верхнечелюстную или нижнечелюстную альвеолярную кость вследствие хирургической операции для замены корня зуба. Вставной имплантат может заменить потерянные зубы, соединяя штифт абатмента после остеointеграции с альвеолярной костью. Система имплантатов компании «Osstem» предназначена для использования в частично или полностью беззубых нижней и верхней челюстях, для поддержки одиночной или многоразовой реставраций, включая: цементную фиксацию, Винт-заглушкаовую фиксацию или накладной протез, а также опору для конечного или временного абатмента для несъемного мостовидного протеза. Он предназначен для отложенной нагрузки.

4. Показания, противопоказания и возможные побочные эффекты.

4.1. Показания к применению

Изделия предназначены для использования со стоматологическими имплантатами для обеспечения поддержки реставрационных конструкций, таких как коронки, мосты или съемные зубные протезы.

4.2. Противопоказания

Противопоказания включают следующее:

- Пациенты с гемофилией или другие трудности, связанные с обработкой кости или раны
- Пациенты с неконтролируемым диабетом, заядлые курильщики или алкоголики
- Пациенты, чья иммунная система неактивна вследствие химиотерапии или лучевой терапии
- Пациенты с инфекцией или воспалением полости рта (неправильная гигиена полости рта, скрежетание зубами)
- Пациенты с неизлечимым нарушенными прикусом/суставом, недостаточно большой зубной дугой

- Любой пациент, которому противопоказаны оперативные вмешательства

4.3. Возможные побочные эффекты при использовании медицинского оборудования

После операции может возникнуть несколько проблем (потеря стабильности имплантата, повреждение протеза и т.д.). Недостаток качества и количества оставшейся кости, инфекция, аллергическая реакция, внутренняя гигиена полости рта или несовместимость пациента, подвижность имплантата, частичное повреждение состояния ткани и неправильное расположение имплантатов могут вызывать вышеупомянутые проблемы.

4.4. Информация о потенциальных потребителях медицинского оборудования

Данное медицинское оборудование предназначено для использования в клинической практике квалифицированными врачами и медицинскими специалистами.

5. Описание принципов, лежащих в основе работы медицинского оборудования и их особенностей

Система имплантатов компании «Osstem» предназначена для использования в частично или полностью беззубых нижней и верхней челюстях, для поддержки одиночной или многоразовой реставраций, включая; цементную фиксацию, Винт-заглушкаовую фиксацию или накладной протез, а также опору для конечного или временного абатмента для несъемного мостовидного протеза. Он предназначен для отложенной нагрузки. Абатменты предназначены для использования со стоматологическими имплантатами для обеспечения поддержки протетических конструкций, таких как коронки, мосты или накладные протезы.

6. Описание основных функциональных частей медицинского оборудования (дизайн и внешний вид, фотография или изображение)

Свяжитесь с уполномоченным представителем производителя или обратитесь на сайт www.osstem.ru для получения дополнительной информации*

*- информацию см. в Приложении 1.

7. Список и описание материалов медицинского оборудования для прямого или непрямого контакта с телом пациента (человеческим телом)

Компоненты для установки стоматологических имплантов TS	Абатмент Rigid	Сплав Ti-6Al-4V (Состав: Ti - 89.55 - 90%, Al 6%, Fe - не более 0.25%, O - не более 0.2%, V - 4%)
	Абатмент Transfer	
	Абатмент Angled	
	Абатмент FreeForm ST	
	Абатмент GoldCast	Сплав на основе золота Gold Alloy (Состав: Au 63.08%, Pt 13.48%, Pd 22.95%, Ir 0.49%)
	Абатмент NP-CAST	Кобальт-хром-молибденовый сплав (Состав, %: Mn 0.7, S 0.003, Cr 27.75, Ni 0.25, Mo 5.5, Cu 0.01, Co 65.25, W 0.1, Fe 0.35)
	Абатмент ZloCera	Циркониевый сплав, производитель KCM CORPORATION, Япония (Состав : ZrO2(88~96%).
	Абатмент ZloCera Angled	

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

	HfO2(до 5%), Y2O3(4-6%)
Абатмент Temporary	Сплав Ti CP-Grade 3(Состав: С – не более 0.1%, Н – не более 0.015%, Fe не более 0.3%, N – не более 0.05%, O – не более 0.35%, Ti – не менее 99.185%)
Абатмент Quick Temporary	Полиэфирэфиркетон, производитель Ensinger France Сплав Ti-6Al-4V (Состав: Ti – 89.55 - 90%, Al 6%, Fe – не более 0.25%, O – не более 0.2%, V - 4%)
Абатмент Multi	Ti-6Al-4V (Состав: Ti – 89.55 - 90%, Al 6%, Fe - 0.25% max, O - 0.2% max, V - 4%)
Носитель Абатментов Multi	POM (Polyoxymethylene) Manufacturer: KOREA ENGINEERING PLASTICS Co., Ltd
Абатмент Multi Angled	Ti-6Al-4V (Состав: Ti – 89.55 - 90%, Al 6%, Fe - 0.25% max, O - 0.2% max, V - 4%)
Носитель Абатментов Multi Angled	
Абатмент Convertible	
Носитель Абатментов Convertible	Полиоксиметилен, производства KOREA ENGINEERING PLASTICS Co., Ltd
Абатмент Stud	Сплав Ti-6Al-4V (Состав: Ti – 89.55 - 90%, Al 6%, Fe – не более 0.25%, O – не более 0.2%, V - 4%)
Абатмент Port Angled	
Винт-заглушка EbonyGold	Сплав Ti-6Al-4V (Состав: Ti – 89.55 - 90%, Al 6%, Fe – не более 0.25%, O – не более 0.2%, V - 4%)
Титановый Винт-заглушка	Сплав Ti-6Al-4V (Состав: Ti – 89.55 - 90%, Al 6%, Fe – не более 0.25%, O – не более 0.2%, V - 4%)
Защитный колпачок Rigid	Поликарбонат медицинский, производства «GE Plastics», Корея


8. Информация в соответствии с данными государственного реестра лекарственных средств для медицинского использования о тех, которые содержатся в медицинском оборудовании
Не применимо

9. Совместимость оборудования

Имплантаты компании «Osstem» и компоненты протеза совместимы только с имплантатами OSSTEM. Они не могут использоваться с другими системами крепления. Использование этого продукта в сочетании с продуктами других производителей может вызвать различные проблемы, в том числе ослабление и перелом имплантата из-за неполной блокировки и проблем с совместимостью.

10. Комплект поставки

1. Абатмент Rigid**

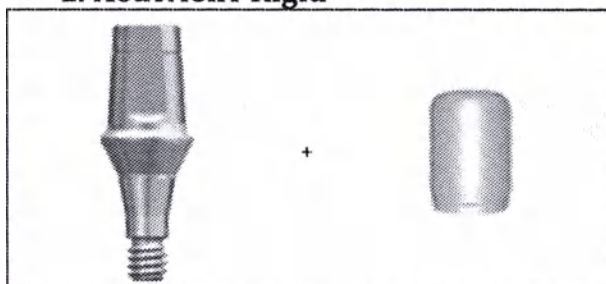

Абатмент	Защитный колпачок
GSRA4410P	GSRA4410 + GSRPC440
GSRA4420P	GSRA4420 + GSRPC440
GSRA4430P	GSRA4430 + GSRPC440
GSRA4440P	GSRA4440 + GSRPC440
GSRA4450P	GSRA4450 + GSRPC440
GSRA4451P	GSRA4451 + GSRPC441
GSRA4610P	GSRA4610 + GSRPC460
GSRA4620P	GSRA4620 + GSRPC460

Инструкция по применению

Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSRA4630P	GSRA4630 + GSRPC460
GSRA4640P	GSRA4640 + GSRPC460
GSRA4650P	GSRA4650 + GSRPC460
GSRA4651P	GSRA4651 + GSRPC461
GSRA4710P	GSRA4710 + GSRPC470
GSRA4720P	GSRA4720 + GSRPC470
GSRA4730P	GSRA4730 + GSRPC470
GSRA4740P	GSRA4740 + GSRPC470
GSRA4750P	GSRA4750 + GSRPC470
GSRA4751P	GSRA4751 + GSRPC471
GSRA4411P	GSRA4411 + GSRPC441
GSRA4421P	GSRA4421 + GSRPC441
GSRA4431P	GSRA4431 + GSRPC441
GSRA4441P	GSRA4441 + GSRPC441
GSRA4611P	GSRA4611 + GSRPC461
GSRA4621P	GSRA4621 + GSRPC461
GSRA4631P	GSRA4631 + GSRPC461
GSRA4641P	GSRA4641 + GSRPC461
GSRA4711P	GSRA4711 + GSRPC471
GSRA4721P	GSRA4721 + GSRPC471
GSRA4731P	GSRA4731 + GSRPC471
GSRA4741P	GSRA4741 + GSRPC471
GSRA4410P	GSRA4410 + GSRPC440
GSRA4420P	GSRA4420 + GSRPC440
GSRA4430P	GSRA4430 + GSRPC440
GSRA4440P	GSRA4440 + GSRPC440
GSRA4450P	GSRA4450 + GSRPC440
GSRA4451P	GSRA4451 + GSRPC441
GSRA4610P	GSRA4610 + GSRPC460
GSRA4620P	GSRA4620 + GSRPC460
GSRA4630P	GSRA4630 + GSRPC460
GSRA4640P	GSRA4640 + GSRPC460
GSRA4650P	GSRA4650 + GSRPC460
GSRA4651P	GSRA4651 + GSRPC461
GSRA4710P	GSRA4710 + GSRPC470
GSRA4720P	GSRA4720 + GSRPC470
GSRA4730P	GSRA4730 + GSRPC470
GSRA4740P	GSRA4740 + GSRPC470
GSRA4750P	GSRA4750 + GSRPC470
GSRA4751P	GSRA4751 + GSRPC471
GSRA4411P	GSRA4411 + GSRPC441
GSRA4421P	GSRA4421 + GSRPC441
GSRA4431P	GSRA4431 + GSRPC441
GSRA4441P	GSRA4441 + GSRPC441
GSRA4611P	GSRA4611 + GSRPC461

GSRA54621P	GSRA54621 + GSRPC461
GSRA54631P	GSRA54631 + GSRPC461
GSRA54641P	GSRA54641 + GSRPC461
GSRA54711P	GSRA54711 + GSRPC471
GSRA54721P	GSRA54721 + GSRPC471
GSRA54731P	GSRA54731 + GSRPC471
GSRA54741P	GSRA54741 + GSRPC471
GSRA5410P	GSRA5410 + GSRPC540
GSRA5420P	GSRA5420 + GSRPC540
GSRA5430P	GSRA5430 + GSRPC540
GSRA5440P	GSRA5440 + GSRPC540
GSRA5450P	GSRA5450 + GSRPC540
GSRA5610P	GSRA5610 + GSRPC560
GSRA5620P	GSRA5620 + GSRPC560
GSRA5630P	GSRA5630 + GSRPC560
GSRA5640P	GSRA5640 + GSRPC560
GSRA5650P	GSRA5650 + GSRPC560
GSRA5710P	GSRA5710 + GSRPC570
GSRA5720P	GSRA5720 + GSRPC570
GSRA5730P	GSRA5730 + GSRPC570
GSRA5740P	GSRA5740 + GSRPC570
GSRA5750P	GSRA5750 + GSRPC570
GSRA6410P	GSRA6410 + GSRPC640
GSRA6420P	GSRA6420 + GSRPC640
GSRA6430P	GSRA6430 + GSRPC640
GSRA6440P	GSRA6440 + GSRPC640
GSRA6450P	GSRA6450 + GSRPC640
GSRA6610P	GSRA6610 + GSRPC660
GSRA6620P	GSRA6620 + GSRPC660
GSRA6630P	GSRA6630 + GSRPC660
GSRA6640P	GSRA6640 + GSRPC660
GSRA6650P	GSRA6650 + GSRPC660
GSRA6710P	GSRA6710 + GSRPC670
GSRA6720P	GSRA6720 + GSRPC670
GSRA6730P	GSRA6730 + GSRPC670
GSRA6740P	GSRA6740 + GSRPC670
GSRA6750P	GSRA6750 + GSRPC670
GSRA7610P	GSRA7610 + GSRPC760
GSRA7620P	GSRA7620 + GSRPC760
GSRA7630P	GSRA7630 + GSRPC760
GSRA7640P	GSRA7640 + GSRPC760
GSRA7650P	GSRA7650 + GSRPC760

2. Абатмент Transfer**

	
Абатмент	Винт-заглушка
GSTA4611WH	GSTA4611 + GSABSM
GSTA4612WH	GSTA4612 + GSABSM
GSTA4621WH	GSTA4621 + GSABSM
GSTA4622WH	GSTA4622 + GSABSM
GSTA4631WH	GSTA4631 + GSABSM
GSTA4632WH	GSTA4632 + GSABSM
GSTA4641WH	GSTA4641 + GSABSM
GSTA4642WH	GSTA4642 + GSABSM
GSTA4651WH	GSTA4651 + GSABSM
GSTA4652WH	GSTA4652 + GSABSM
GSTA4661WH	GSTA4661 + GSABSM
GSTA4662WH	GSTA4662 + GSABSM

GSTA4671WH	GSTA4671 + GSABSM
GSTA4672WH	GSTA4672 + GSABSM
GSTA4711WH	GSTA4711 + GSABSM
GSTA4712WH	GSTA4712 + GSABSM
GSTA4721WH	GSTA4721 + GSABSM
GSTA4722WH	GSTA4722 + GSABSM
GSTA4731WH	GSTA4731 + GSABSM
GSTA4732WH	GSTA4732 + GSABSM
GSTA4741WH	GSTA4741 + GSABSM
GSTA4742WH	GSTA4742 + GSABSM
GSTA4751WH	GSTA4751 + GSABSM
GSTA4752WH	GSTA4752 + GSABSM
GSTA4761WH	GSTA4761 + GSABSM
GSTA4762WH	GSTA4762 + GSABSM
GSTA4771WH	GSTA4771 + GSABSM
GSTA4772WH	GSTA4772 + GSABSM
GSTA5410WH	GSTA5410 + GSABSS
GSTA5420WH	GSTA5420 + GSABSS
GSTA5430WH	GSTA5430 + GSABSS
GSTA5440WH	GSTA5440 + GSABSS
GSTA5450WH	GSTA5450 + GSABSS
GSTA5460WH	GSTA5460 + GSABSS
GSTA5470WH	GSTA5470 + GSABSS

Инструкция по применению

Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSTA5610WH	GSTA5610 + GSABSS
GSTA5620WH	GSTA5620 + GSABSS
GSTA5630WH	GSTA5630 + GSABSS
GSTA5640WH	GSTA5640 + GSABSS
GSTA5650WH	GSTA5650 + GSABSS
GSTA5660WH	GSTA5660 + GSABSS
GSTA5670WH	GSTA5670 + GSABSS
GSTA5710WH	GSTA5710 + GSABSS
GSTA5720WH	GSTA5720 + GSABSS
GSTA5730WH	GSTA5730 + GSABSS
GSTA5740WH	GSTA5740 + GSABSS
GSTA5750WH	GSTA5750 + GSABSS
GSTA5760WH	GSTA5760 + GSABSS
GSTA5770WH	GSTA5770 + GSABSS
GSTA6410WH	GSTA6410 + GSABSS
GSTA6420WH	GSTA6420 + GSABSS
GSTA6430WH	GSTA6430 + GSABSS
GSTA6440WH	GSTA6440 + GSABSS
GSTA6450WH	GSTA6450 + GSABSS
GSTA6460WH	GSTA6460 + GSABSS
GSTA6470WH	GSTA6470 + GSABSS
GSTA6610WH	GSTA6610 + GSABSS
GSTA6620WH	GSTA6620 + GSABSS
GSTA6630WH	GSTA6630 + GSABSS
GSTA6640WH	GSTA6640 + GSABSS
GSTA6650WH	GSTA6650 + GSABSS
GSTA6660WH	GSTA6660 + GSABSS
GSTA6670WH	GSTA6670 + GSABSS
GSTA6710WH	GSTA6710 + GSABSS
GSTA6720WH	GSTA6720 + GSABSS
GSTA6730WH	GSTA6730 + GSABSS
GSTA6740WH	GSTA6740 + GSABSS
GSTA6750WH	GSTA6750 + GSABSS
GSTA6760WH	GSTA6760 + GSABSS
GSTA6770WH	GSTA6770 + GSABSS
GSTA7410WH	GSTA7410 + GSABSS
GSTA7420WH	GSTA7420 + GSABSS
GSTA7430WH	GSTA7430 + GSABSS
GSTA7440WH	GSTA7440 + GSABSS
GSTA7450WH	GSTA7450 + GSABSS
GSTA7460WH	GSTA7460 + GSABSS
GSTA7470WH	GSTA7470 + GSABSS
GSTA7610WH	GSTA7610 + GSABSS
GSTA7620WH	GSTA7620 + GSABSS
GSTA7630WH	GSTA7630 + GSABSS
GSTA7640WH	GSTA7640 + GSABSS
GSTA7650WH	GSTA7650 + GSABSS
GSTA7660WH	GSTA7660 + GSABSS
GSTA7670WH	GSTA7670 + GSABSS
GSTA84611WH	GSTA84611 + GSABSS
GSTA84621WH	GSTA84621 + GSABSS
GSTA84631WH	GSTA84631 + GSABSS
GSTA84641WH	GSTA84641 + GSABSS
GSTA84651WH	GSTA84651 + GSABSS
GSTA84661WH	GSTA84661 + GSABSS
GSTA84671WH	GSTA84671 + GSABSS
GSTA84711WH	GSTA84711 + GSABSS
GSTA84721WH	GSTA84721 + GSABSS
GSTA84731WH	GSTA84731 + GSABSS
GSTA84741WH	GSTA84741 + GSABSS
GSTA84751WH	GSTA84751 + GSABSS
GSTA84761WH	GSTA84761 + GSABSS
GSTA84771WH	GSTA84771 + GSABSS
GSTA4611NWH	GSTA4611N + GSABSM
GSTA4612NWH	GSTA4612N + GSABSM
GSTA4621NWH	GSTA4621N + GSABSM
GSTA4622NWH	GSTA4622N + GSABSM
GSTA4631NWH	GSTA4631N + GSABSM
GSTA4632NWH	GSTA4632N + GSABSM
GSTA4641NWH	GSTA4641N + GSABSM
GSTA4642NWH	GSTA4642N + GSABSM
GSTA4651NWH	GSTA4651N + GSABSM


GSTA4652NWH	GSTA4652N + GSABSM
GSTA4661NWH	GSTA4661N + GSABSM
GSTA4662NWH	GSTA4662N + GSABSM
GSTA4671NWH	GSTA4671N + GSABSM
GSTA4672NWH	GSTA4672N + GSABSM
GSTA4711NWH	GSTA4711N + GSABSM
GSTA4712NWH	GSTA4712N + GSABSM
GSTA4721NWH	GSTA4721N + GSABSM
GSTA4722NWH	GSTA4722N + GSABSM
GSTA4731NWH	GSTA4731N + GSABSM
GSTA4732NWH	GSTA4732N + GSABSM
GSTA4741NWH	GSTA4741N + GSABSM
GSTA4742NWH	GSTA4742N + GSABSM
GSTA4751NWH	GSTA4751N + GSABSM
GSTA4752NWH	GSTA4752N + GSABSM
GSTA4761NWH	GSTA4761N + GSABSM
GSTA4762NWH	GSTA4762N + GSABSM
GSTA4771NWH	GSTA4771N + GSABSM
GSTA4772NWH	GSTA4772N + GSABSM
GSTA5410NWH	GSTA5410N + GSABSS
GSTA5420NWH	GSTA5420N + GSABSS
GSTA5430NWH	GSTA5430N + GSABSS
GSTA5440NWH	GSTA5440N + GSABSS
GSTA5450NWH	GSTA5450N + GSABSS
GSTA5460NWH	GSTA5460N + GSABSS
GSTA5470NWH	GSTA5470N + GSABSS
GSTA5610NWH	GSTA5610N + GSABSS
GSTA5620NWH	GSTA5620N + GSABSS
GSTA5630NWH	GSTA5630N + GSABSS
GSTA5640NWH	GSTA5640N + GSABSS
GSTA5650NWH	GSTA5650N + GSABSS
GSTA5660NWH	GSTA5660N + GSABSS
GSTA5670NWH	GSTA5670N + GSABSS
GSTA5710NWH	GSTA5710N + GSABSS
GSTA5720NWH	GSTA5720N + GSABSS
GSTA5730NWH	GSTA5730N + GSABSS
GSTA5740NWH	GSTA5740N + GSABSS
GSTA5750NWH	GSTA5750N + GSABSS
GSTA5760NWH	GSTA5760N + GSABSS
GSTA5770NWH	GSTA5770N + GSABSS
GSTA6410NWH	GSTA6410N + GSABSS
GSTA6420NWH	GSTA6420N + GSABSS
GSTA6430NWH	GSTA6430N + GSABSS
GSTA6440NWH	GSTA6440N + GSABSS
GSTA6450NWH	GSTA6450N + GSABSS
GSTA6460NWH	GSTA6460N + GSABSS
GSTA6470NWH	GSTA6470N + GSABSS
GSTA6610NWH	GSTA6610N + GSABSS
GSTA6620NWH	GSTA6620N + GSABSS
GSTA6630NWH	GSTA6630N + GSABSS
GSTA6640NWH	GSTA6640N + GSABSS
GSTA6650NWH	GSTA6650N + GSABSS
GSTA6660NWH	GSTA6660N + GSABSS
GSTA6670NWH	GSTA6670N + GSABSS
GSTA6710NWH	GSTA6710N + GSABSS
GSTA6720NWH	GSTA6720N + GSABSS
GSTA6730NWH	GSTA6730N + GSABSS
GSTA6740NWH	GSTA6740N + GSABSS
GSTA6750NWH	GSTA6750N + GSABSS
GSTA6760NWH	GSTA6760N + GSABSS
GSTA6770NWH	GSTA6770N + GSABSS
GSTA7410NWH	GSTA7410N + GSABSS
GSTA7420NWH	GSTA7420N + GSABSS
GSTA7430NWH	GSTA7430N + GSABSS
GSTA7440NWH	GSTA7440N + GSABSS
GSTA7450NWH	GSTA7450N + GSABSS
GSTA7460NWH	GSTA7460N + GSABSS
GSTA7470NWH	GSTA7470N + GSABSS
GSTA7610NWH	GSTA7610N + GSABSS
GSTA7620NWH	GSTA7620N + GSABSS
GSTA7630NWH	GSTA7630N + GSABSS

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSTA7640NWH	GSTA7640N + GSABSS
GSTA7650NWH	GSTA7650N + GSABSS
GSTA7660NWH	GSTA7660N + GSABSS
GSTA7670NWH	GSTA7670N + GSABSS
GSTAS4611NWH	GSTAS4611N + GSABSS
GSTAS4621NWH	GSTAS4621N + GSABSS
GSTAS4631NWH	GSTAS4631N + GSABSS
GSTAS4641NWH	GSTAS4641N + GSABSS
GSTAS4651NWH	GSTAS4651N + GSABSS

GSTAS4661NWH	GSTAS4661N + GSABSS
GSTAS4671NWH	GSTAS4671N + GSABSS
GSTAS4711NWH	GSTAS4711N + GSABSS
GSTAS4721NWH	GSTAS4721N + GSABSS
GSTAS4731NWH	GSTAS4731N + GSABSS
GSTAS4741NWH	GSTAS4741N + GSABSS
GSTAS4751NWH	GSTAS4751N + GSABSS
GSTAS4761NWH	GSTAS4761N + GSABSS
GSTAS4771NWH	GSTAS4771N + GSABSS

3. Абатмент Angled**

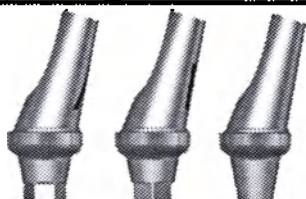

Абатмент



<GSABSM><GSABSS>

Винт-заглушка

GSAA4520AWH	GSAA4520A + GSABSS
GSAA4520BWH	GSAA4520B + GSABSS
GSAA4520NWH	GSAA4520N + GSABSS
GSAA4540AWH	GSAA4540A + GSABSS
GSAA4540BWH	GSAA4540B + GSABSS
GSAA4540NWH	GSAA4540N + GSABSS
GSAA5020AWH	GSAA5020A + GSABSS
GSAA5020BWH	GSAA5020B + GSABSS
GSAA5020NWH	GSAA5020N + GSABSS
GSAA5040AWH	GSAA5040A + GSABSS
GSAA5040BWH	GSAA5040B + GSABSS
GSAA5040NWH	GSAA5040N + GSABSS
GSAA6020AWH	GSAA6020A + GSABSS
GSAA6020BWH	GSAA6020B + GSABSS

GSAA6020NWH	GSAA6020N + GSABSS
GSAA6040AWH	GSAA6040A + GSABSS
GSAA6040BWH	GSAA6040B + GSABSS
GSAA6040NWH	GSAA6040N + GSABSS
GSAA4020MAWH	GSAA4020MA + GSABSM
GSAA4020MBWH	GSAA4020MB + GSABSM
GSAA4020MNWH	GSAA4020MN + GSABSM
GSAA4040MAWH	GSAA4040MA + GSABSM
GSAA4040MBWH	GSAA4040MB + GSABSM
GSAA4040MNWH	GSAA4040MN + GSABSM
GSAA4520MAWH	GSAA4520MA + GSABSM
GSAA4520MBWH	GSAA4520MB + GSABSM
GSAA4520MNWH	GSAA4520MN + GSABSM
GSAA4540MAWH	GSAA4540MA + GSABSM
GSAA4540MBWH	GSAA4540MB + GSABSM
GSAA4540MNWH	GSAA4540MN + GSABSM

4. Абатмент FreeForm ST**

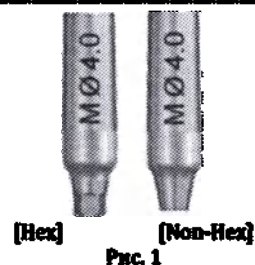


Рис. 1

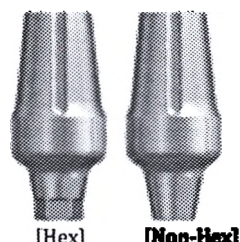


Рис. 2

Абатмент



Винт-заглушка

GSFAM4015WH	GSFAM4015 + GSABSM
GSFAM4030WH	GSFAM4030 + GSABSM
GSFA4015WH	GSFA4015 + GSABSS
GSFA4030WH	GSFA4030 + GSABSS
GSFAM4015NWH	GSFAM4015N + GSABSM

Рис. 1

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

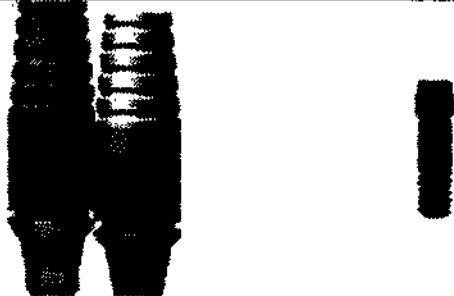
GSPAM4030NWH	GSPAM4030N + GSABSM
GSPA4015NWH	GSPA4015N + GSABSS
GSPA4030NWH	GSPA4030N + GSABSS
GSPA5015WH	GSPA5015 + GSABSS
GSPA5030WH	GSPA5030 + GSABSS
GSPA6015WH	GSPA6015 + GSABSS
GSPA6030WH	GSPA6030 + GSABSS
GSPA7015WH	GSPA7015 + GSABSS
GSPA7030WH	GSPA7030 + GSABSS
GSPAS5015WH	GSPAS5015 + GSABSS
GSPAS5030WH	GSPAS5030 + GSABSS
GSPA5015NWH	GSPA5015N + GSABSS
GSPA5030NWH	GSPA5030N + GSABSS
GSPA6015NWH	GSPA6015N + GSABSS
GSPA6030NWH	GSPA6030N + GSABSS
GSPA7015NWH	GSPA7015N + GSABSS
GSPA7030NWH	GSPA7030N + GSABSS
GSPAS5015NWH	GSPAS5015N + GSABSS
GSPAS5030NWH	GSPAS5030N + GSABSS

Рис. 2

5. Абатмент GoldCast**

	
Hex] Non-	
Абатмент	Винт-заглушка
GSGA4010SWH	GSGA4010S + GSABSM
GSGA4030SWH	GSGA4030S + GSABSM
GSGA4510SWH	GSGA4510S + GSABSS
GSGA4530SWH	GSGA4530S + GSABSS
GSGA4010BWH	GSGA4010B + GSABSM
GSGA4030BWH	GSGA4030B + GSABSM
GSGA4510BWH	GSGA4510B + GSABSS
GSGA4530BWH	GSGA4530B + GSABSS

6. Абатмент NP-CAST**

	
Абатмент	Винт-заглушка
GSNA4010BWH	GSNA4010B + GSABSM
GSNA4030BWH	GSNA4030B + GSABSM
GSNA4510BWH	GSNA4510B + GSABSS
GSNA4530BWH	GSNA4530B + GSABSS
GSNA4010SWH	GSNA4010S + GSABSM
GSNA4030SWH	GSNA4030S + GSABSM
GSNA4510SWH	GSNA4510S + GSABSS
GSNA4530SWH	GSNA4530S + GSABSS


7. Абатмент ZioCera**

	
Абатмент	Винт-заглушка
GSZAM4535WH	GSZAM4535 + GSASM
GSZAM4550WH	GSZAM4550 + GSASM
GSZAM4535NWH	GSZAM4535N + GSASM
GSZAM4550NWH	GSZAM4550N + GSASM
GSZAS4535WH	GSZAS4535 + GSASR
GSZAS4550WH	GSZAS4550 + GSASR
GSZAS5535WH	GSZAS5535 + GSASR
GSZAS5550WH	GSZAS5550 + GSASR
GSZAS6535WH	GSZAS6535 + GSASR
GSZAS6550WH	GSZAS6550 + GSASR
GSZAS4535NWH	GSZAS4535N + GSASR
GSZAS4550NWH	GSZAS4550N + GSASR
GSZAS5535NWH	GSZAS5535N + GSASR
GSZAS5550NWH	GSZAS5550N + GSASR
GSZAS6535NWH	GSZAS6535N + GSASR
GSZAS6550NWH	GSZAS6550N + GSASR

8. Абатмент ZioCera Angled**


	
Абатмент	Винт-заглушка
GS17ZAS5530WH	GS17ZAS5530 + GSASR
GS17ZAS6540WH	GS17ZAS6540 + GSASR
GS17ZAS5530NWH	GS17ZAS5530N + GSASR
GS17ZAS6540NWH	GS17ZAS6540N + GSASR

9. Абатмент Temporary*

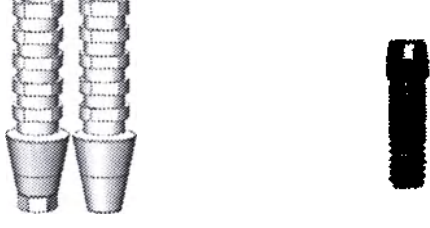
	
Абатмент	Винт-заглушка
GSTTA4010TH	GSTTA4010 + GSABSM
GSTTA4030TH	GSTTA4030 + GSABSM
GSTTA4510TH	GSTTA4510 + GSABSS
GSTTA4530TH	GSTTA4530 + GSABSS
GSTTA4010NTH	GSTTA4010N + GSABSM
GSTTA4030NTH	GSTTA4030N + GSABSM
GSTTA4510NTH	GSTTA4510N + GSABSS
GSTTA4530NTH	GSTTA4530N + GSABSS

10. Абатмент Quick Temporary*

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

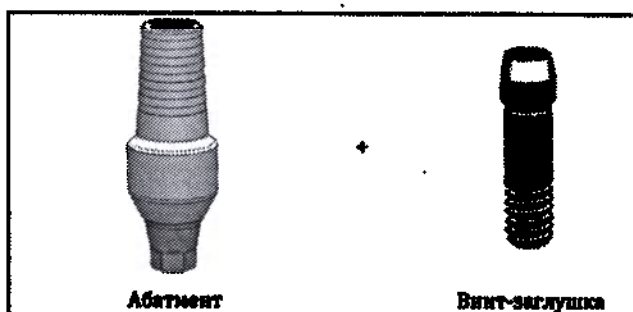


TSQTA4550TH	TSQTA4550+ GSABSMT	Hex
TSQTA5550TH	TSQTA5550+ GSABSST	Hex
TSQTA4550NTH	TSQTA4550N+ GSABSMT	Non-Hex
TSQTA5550NTH	TSQTA5550N+ GSABSST	Non-Hex

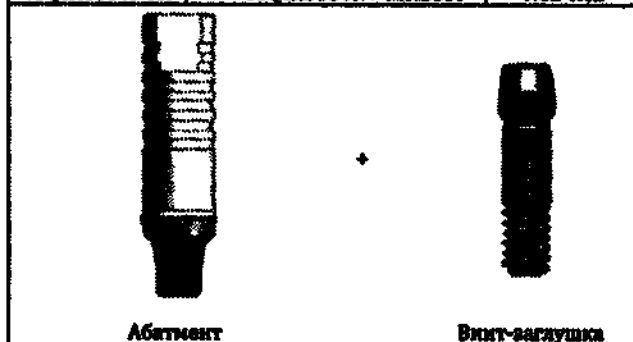

TSQTA4015MTH	TSQTA4015M + GSABSMT	Hex
TSQTA4050MTH	TSQTA4050M + GSABSMT	Hex
TSQTA4515RTH	TSQTA4515R + GSABSST	Hex
TSQTA4550RTH	TSQTA4550R + GSABSST	Hex
TSQTA4015MNTH	TSQTA4015MN + GSABSMT	Non-Hex
TSQTA4050MNTH	TSQTA4050MN + GSABSMT	Non-Hex
TSQTA4515RNTH	TSQTA4515RN + GSABSST	Non-Hex
TSQTA4550RNTH	TSQTA4550RN + GSABSST	Non-Hex


11. Абатмент Multi**

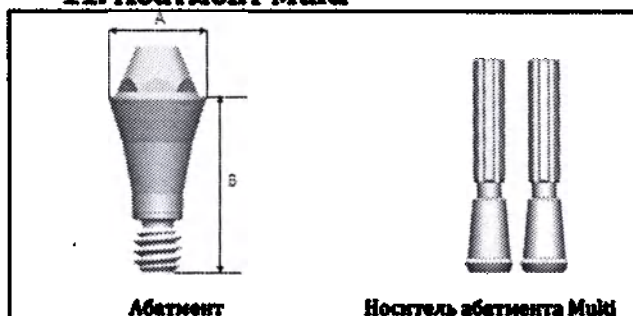

TSMA5010MP	TSMA5010M + TSMACK500M	Mini
TSMA5020MP	TSMA5020M + TSMACK500M	Mini
TSMA5030MP	TSMA5030M + TSMACK500M	Mini
TSMA5040MP	TSMA5040M + TSMACK500M	Mini
TSMA5050MP	TSMA5050M + TSMACK500M	Mini
TSMA5010P	TSMA5010 + TSMACK500R	Regular
TSMA5020P	TSMA5020 + TSMACK500R	Regular


TSMA5030P	TSMA5030 + TSMACK500R	Regular
TSMA5040P	TSMA5040 + TSMACK500R	Regular
TSMA5050P	TSMA5050 + TSMACK500R	Regular

12. Абатмент Multi Angled**

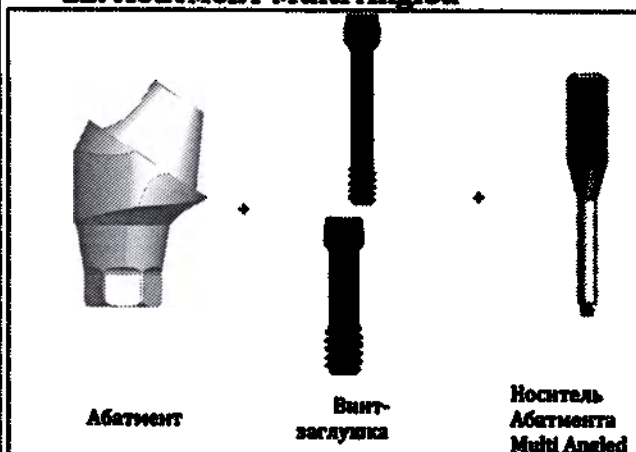

GS17MAM4820WH	GS17MAM4820 + GSMABSM+ GSMACM
GS17MAM4830WH	GS17MAM4830 + GSMABSM+ GSMACM
GS30MAM4830WH	GS30MAM4830 + GSMABSM+ GSMACM
GS17MAM4840WH	GS17MAM4840 + GSMABSM+ GSMACM
GS30MAM4840WH	GS30MAM4840 + GSMABSM+ GSMACM
GS30MAM4850WH	GS30MAM4850 + GSMABSM+ GSMACM
GS17MAS4820WH	GS17MAS4820 + GSMABSS + GSMAC
GS17MAS4830WH	GS17MAS4830 + GSMABSS + GSMAC
GS30MAS4830WH	GS30MAS4830 + GSMABSS + GSMAC
GS17MAS4840WH	GS17MAS4840 + GSMABSS + GSMAC
GS30MAS4840WH	GS30MAS4840 + GSMABSS + GSMAC
GS30MAS4850WH	GS30MAS4850 + GSMABSS + GSMAC

13. Абатмент Convertible**

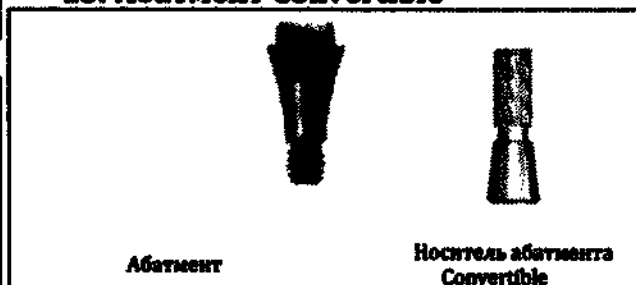


GSCA4010P	GSCA4010 + GSCK400
GSCA4020P	GSCA4020 + GSCK400
GSCA4030P	GSCA4030 + GSCK400
GSCA4040P	GSCA4040 + GSCK400
GSCA4010P	GSCA4010 + GSCK400
GSCA4020P	GSCA4020 + GSCK400
GSCA4030P	GSCA4030 + GSCK400
GSCA4040P	GSCA4040 + GSCK400
GSCA5010P	GSCA5010 + GSCK500
GSCA5020P	GSCA5020 + GSCK500
GSCA5030P	GSCA5030 + GSCK500
GSCA5040P	GSCA5040 + GSCK500
GSCA5050P	GSCA5050 + GSCK500
GSCA6010P	GSCA6010 + GSCK600
GSCA6020P	GSCA6020 + GSCK600
GSCA6030P	GSCA6030 + GSCK600
GSCA6040P	GSCA6040 + GSCK600

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSCA6050P GSCA6050 + GSCK600

14. Абатмент Stud**

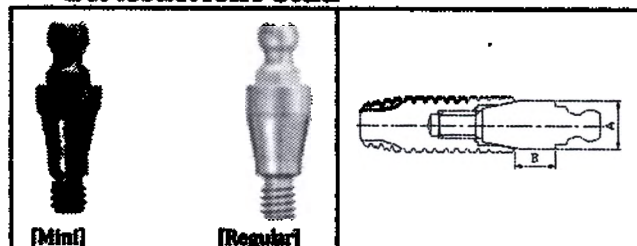

GSSAM3510
GSSAM3520
GSSAM3530
GSSAM3540
GSSAM3550
GSSAM3560
GSSA3510
GSSA3520
GSSA3530
GSSA3540
GSSA3550
GSSA3560

15. Абатмент Port Angled**



Абатмент	Винт-заглушка	
TS10PA454MWH	TS10PA454M + GSMABSM	Mini
TS10PA455MWH	TS10PA455M + GSMABSM	Mini
TS17PA454MWH	TS17PA454M + GSMABSM	Mini
TS17PA455MWH	TS17PA455M + GSMABSM	Mini
TS30PA454MWH	TS30PA454M + GSMABSM	Mini
TS30PA455MWH	TS30PA455M + GSMABSM	Mini
TS10PA454RWH	TS10PA454R + GSMABSS	Regular
TS10PA455RWH	TS10PA455R + GSMABSS	Regular
TS17PA454RWH	TS17PA454R + GSMABSS	Regular
TS17PA455RWH	TS17PA455R + GSMABSS	Regular
TS30PA454RWH	TS30PA454R + GSMABSS	Regular
TS30PA455RWH	TS30PA455R + GSMABSS	Regular

16. Винты-заглушки*

GSABSM
GSABSS
GSASM
GSASR
GSABSMT
GSABSST
GSMABSM
GSMABSS

11. Маркировка и упаковка медицинского оборудования

Обозначение символов

Следующий список символов относится к различным продуктам. Посмотрите на этикетки упаковки продукта, чтобы знать, какие символы относятся к этому продукту.

Символ	Описание
	Код партии
	Использовать до
	Номер повторного заказа
	Дата производства
	Производитель
	Только для одноразового применения



Внимание! Обратитесь к сопроводительным документам

Упаковка для абатмента Multi Angled это пакет, который содержит абатмент и инструкцию по применению.

Упаковка для: абатмент Rigid, абатмент Transfer, абатмент Angled, абатмент FreeForm ST, абатмент GoldCast, абатмент NP-CAST, абатмент ZioCera, абатмент ZioCera Angled, абатмент Temporary, абатмент Quick Temporary, абатмент Multi, абатмент Convertible, абатмент Stud, абатмент Port Angled, винты-заглушки это блистер, который вместе с инструкцией помещен в картонную коробку.

12. Перечень материалов животного и (или) человеческого происхождения с указанием информации о их биосовместимости и безопасности, о выборе источников (доноров), отборе проб, обработке, хранении и переработке этих материалов

Не применимо.

13. Проведенные испытания, отчеты об испытаниях, анализ данных

Внутренние стандарты	Испытание на момент отвинчивания для абатмента Rigid	Прошел
Внутренние стандарты	Статическое испытание на выносливость для абатмента Rigid	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на момент отвинчивания для абатмента Transfer	Прошел
Внутренние стандарты	Статическое испытание на выносливость для абатмента Transfer	Прошел
ISO 14801 (2007)	Проверка точности, испытание на сдвиговое усилие сжатия, испытание на выносливость, испытание на стерильность для абатмента Transfer (Ø3,0)	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на сжатие (абатмент TS Angled)	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка точности (абатмент TS Angled)	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на момент проскальзывания (абатмент TS Angled)	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на выносливость (абатмент TS Angled)	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на угол поворота (абатмент TS Angled)	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на разрушающее усилие поворота (абатмент TS Angled)	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка по внешнему виду и размерам для абатмента TS Angled	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка по внешнему виду для абатмента TS FreeForm ST	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка по размерам для абатмента TS FreeForm ST	Прошел
Внутренние стандарты	Тест на измерение зазора между имплантатом и абатментом для абатмента Gold Cast	Прошел
ISO 14801	Испытание на выносливость для цилиндра TS Convertible GoldCast	Прошел
ISO 14801	Испытания на выносливость, по размерам, на момент отвинчивания, разрушающее усилие поворота, сдвиговое усилие сжатия для абатмента NP-Cast Abutment	Прошел
ISO 14801	Испытание на выносливость для абатмента NP-Cast	Прошел
ISO 14801	Испытание на выносливость для абатмента TS Quick temporary	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка по внешнему виду и размерам для абатмента TS Quick temporary	Прошел
ISO 14801	Статическое испытание на выносливость и разрушающее усилие поворота для абатмента ZioCera (тип Straight)	Прошел
ISO 14801	Статическое испытание на выносливость и разрушающее усилие поворота для абатмента ZioCera (тип Angled)	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка по размерам для абатмента TS Ziocera	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка по внешнему виду для абатмента TS Ziocera	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка упаковки для абатмента TS Ziocera	Прошел

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

Внутренние стандарты	Испытание на сдвиговое усилие сжатия для абатмента TS Zlocera	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на усталость при переменном сжатии для абатмента TS Zlocera	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на угол поворота для абатмента TS Zlocera	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на момент отвинчивания для абатмента TS Zlocera	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на разрушающее усилие поворота для абатмента TS Zlocera	Прошел
Внутренние стандарты	Протокол испытания на выносливость для абатмента TS Multi Angl	Прошел
Внутренние стандарты	Протокол испытания на выносливость для абатмента TS Multi Angl	Прошел
ISO 14801	Статическое испытание на выносливость для абатмента TS Multi Angled	Прошел
ISO 14801	Испытание на выносливость для абатмента TS Multi Angled	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на компенсацию направления для абатмента TS Multi	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка по внешнему виду и размерам для абатмента TS Multi	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка по внешнему виду и размерам для Port angled head	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка по внешнему виду и размерам для абатмента Port angled	Прошел
Внутренние стандарты	Испытание на выносливость для абатмента Port angled	Прошел
Внутренние стандарты	Проверка по внешнему виду и размерам для абатмента Port angled	Прошел
ISO 14801	Измерение сопротивления растяжению для абатмента TS Temporary	Прошел
ISO 14801	Замплатат секция конуса абатмента Temporary	Прошел
ISO 14801	Статические испытания для абатмента TS Temporary	Прошел
ISO 14801	Испытание на выносливость для абатмента TS Temporary	Прошел
Внутренние стандарты	Тест ретенции для защитного колпачка TS Rigid	Прошел

14. Требования к обслуживанию и ремонту медицинского оборудования
Не применимо

15. Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского оборудования

15.1. Защита окружающей среды

Требования к защите окружающей среды при применении медицинского оборудования:

Использование, транспортировка и хранение медицинского оборудования не оказывает неблагоприятного воздействия на людей и окружающую среду.

15.2. Процедура утилизации/уничтожения МО

При утилизации необходимо соблюдать местные требования и правила больницы. Использованные продукты следует утилизировать в соответствии с SanPiN 2.1.7.2790-10 Класс В. Неиспользованные продукты утилизируются в соответствии с SanPiN 2.1.7.2790-10 Класс А в качестве бытовых отходов.

16. Класс риска в зависимости от потенциального риска медицинского изделия в соответствии с номенклатурой

Компоненты для установки стоматологических имплантов TS соответствуют основным требованиям и положениям Директивы Совета 93/42/ЕЕС с поправками, внесенными в 2007/47/ЕС, и имеет риск класса IIa.

Компоненты для установки стоматологических имплантов TS соответствуют основным требованиям и положениям Постановления Минздрава РФ от 6 июня 2012 года № 4н Москва «Об утверждении классификации товарных знаков медицинской продукции» и имеет класс риска 2a.

Характер контакта с телом: имплантируемое устройство.

Продолжительность контакта: постоянный (более 30 дней).

Оборудование не является стерильным, стерилизуется

Инвазивность: инвазивное

17. Предостережения и меры предосторожности

Общие меры предосторожности

Хирургическая установка зубного имплантата является экспертной и сложной процедурой. Для проведения имплантации требуется формальное обучение.

Меры предосторожности

Определите местную анатомию и пригодность доступной кости для размещения имплантата. Подготовьте имплантат, учитывая ожидаемые ситуации и предостережения. Визуальный осмотр, а также панорамные и периапикальные рентгенограммы необходимы для определения анатомических ориентиров, окклюзионных состояний, периодонтального состояния и адекватности кости.

Процедурные меры предосторожности (операция)

Все рабочие инструменты должны поддерживаться в надлежащем состоянии. Поскольку конструкции имплантатов, протезные структуры и инструменты имеют небольшие размеры, следует проявлять осторожность, чтобы предотвратить глотание и/или удушье пациента. Информация об имплантатах (TS, SS, US) и информация о совместимости (Mini, Regular, Wide) абатмента и имплантата должны быть подтверждены перед использованием, чтобы предотвратить ослабление или разрушение, вызванные ошибочной блокировкой. После фиксации абатмента к имплантату подтвердите правильность блокировки с помощью радиографического изображения. Винт-заглушка должен быть заблокирован с использованием крутящего момента, указанного на упаковке Tyvek. Для предотвращения ослабления рекомендуется повторное затягивание примерно 2~3 раза. Чрезмерный крутящий момент затяжки может привести к перелому Винта-заглушки. Абатмент Angled может быть сломан из-за ограничений жесткости имплантата. Его не рекомендуется использовать в боковом отделе. При изготовлении протеза важно правильно распределить нагрузку. В случае моста должна быть подтверждена совместимость между протезом и абатментом и должна быть сделана коррекция прикуса. Чрезмерная консольная конструкция может вызвать перелом системы имплантатов. Изготовление протеза с использованием керамического абатмента требует специальной техники, и техник должен быть обучен надлежащим образом.

Предостережения для пациентов

Поддерживайте чистоту полости рта. Не подвергайте зубы чрезмерному напряжению до тех пор, пока не будет установлен последний протез.

Предупреждение

Пациент, неподходящий для операции, или выбор неуместных хирургических методов может привести к потере имплантата или к потере кости, поддерживающей имплантат. Имплантаты производства компании «Osstem» не должны использоваться в целях, отличных от рекомендуемого использования, и их нельзя реконструировать. Подвижность имплантата, потеря костной массы и хроническая инфекция могут привести к неудаче операции по вживлению имплантата.

Совместимость с МРТ

Не применимо

18. Методы и устройства для дезинфекции и стерилизации

Компоненты для установки стоматологических имплантов TS предоставляются в нестерильном состоянии. Однако нестерилизованные продукты должны быть стерилизованы в паровом стерилизаторе при температуре 132 °C в течение 15 минут перед использованием. После паровой стерилизации абатменты следует просушить в течение 15 минут перед использованием.

19. Срок годности, срок службы
Не ограничен

20. Срок эксплуатации в человеческом теле
Постоянный

21. Условия эксплуатации, транспортировка и хранение

Не помещайте абатменты в место появления любой возможной инфекции. Храните продукт в сухом месте при комнатной температуре. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Транспортировка изделий должна осуществляться в транспортной упаковке при перевозке закрытого типа с соблюдением мер и правил перевозки, действующих для выбранного вида транспорта.

	Условия эксплуатации	Условия транспортировки	Условия хранения
Температура °C	От +18°C(0/+2) до +40°C(-2/0)	От +1°C(0/+2) до +30°C(-2/0)	От +1°C(0/+2) до +30°C(-2/0)
Атмосферное давление	От 520 гПа(0/+3,5) до 1060 гПа (-3,5/0)	От 500 гПа(0/+3,5) до 1050 гПа(-3,5/0)	От 500 гПа(0/+3,5) до 1050 гПа(-3,5/0)
Уровень влажности	От 0% (0/+5) до 100% (-5/0)	Не более 60%(± 5)	Не более 60%(± 5)

22. Требования к установке оборудования

Не применимо

23. Гарантия
Гарантийный срок 1 год;
Гарантийный срок хранения продукта составляет 1 год.

24. Список национальных и международных нормативных документов/стандартов, которые соответствуют медицинскому оборудованию

EN 980:2008	Символы, которые используются при маркировке медицинского оборудования
EN 1041:2008	Информация, предоставленная производителем медицинских изделий
EN 1641:2009	Стоматология - Медицинские стоматологические приборы - Материалы
EN 1642:2011	Стоматология - Медицинские стоматологические приборы - Зубные имплантаты
ISO 5832-2:1999	Имплантаты для операции. Металлические материалы. Нелегированный титан
ISO 5832-4:2014	Имплантаты для операции - Металлические материалы - Часть 4: литый сплав из кобальта, хрома и молибдена
ISO 7405:2008	Стоматология - Оценка биосовместимости медицинского оборудования, используемого в стоматологии
EN ISO 10993-1: 2009	Биологическая оценка медицинского оборудования. Часть 1. Оценка и тестирование в процессе управления рисками
EN ISO 10993-3:2014	Биологическая оценка медицинского оборудования. Часть 3. Тесты на генотоксичность, канцерогенность и репродуктивную токсичность
EN ISO 10993-5:2009	Биологическая оценка медицинского оборудования. Часть 5. Тесты на цитотоксичность в лабораторных условиях

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

EN ISO 10993-6:2009	Биологическая оценка медицинского оборудования - Часть 6: Тесты на местную реакцию после имплантации
ISO 10993-10:2010	Биологическая оценка медицинского оборудования - Часть 10: Тесты на раздражение и гиперчувствительность замедленного типа
EN ISO 10993-11:2009	Биологическая оценка медицинского оборудования - Часть 11: Тесты на системную токсичность
EN ISO 13485:2012	Медицинское оборудование - Системы управления качеством - Требования к нормативным целям
ISO 14801:2016	Стоматология - Имплантаты - Испытания на динамическую выносливость для эндоскопических имплантатов
EN ISO 14971:2012	Медицинское оборудование - Применение управления рисками к медицинским приборам

25. Служба по работе с клиентами

Для получения дополнительной информации обратитесь к уполномоченному представителю производителя компании «Osstem Implant LLP» или свяжитесь с компанией «Osstem Implant Co. Ltd», как указано ниже:

Компания «Osstem Implant Co. Ltd», Корея

66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Пусан, 48002, Республика Корея

Тел.: 82-51-850-2500 Факс: 82-51-861-4693

www.osstem.com

Представитель в России:

ООО «Осстем»

Российская Федерация, 115432 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, д. 18, кор. 7, помещение 1Е/13


Тел.: +7-495-739-9925

**1. Приложение 1. Описание основных функциональных частей
медицинского оборудования**

(клиент получает эту информацию посредством Связи с уполномоченным представителем производителя или обратившись на сайт www.osstem.ru)


1. Абатмент Rigid

Абатмент Rigid легко устанавливает протез, потому что форма Винт-заглушка являет собой прочную структуру.

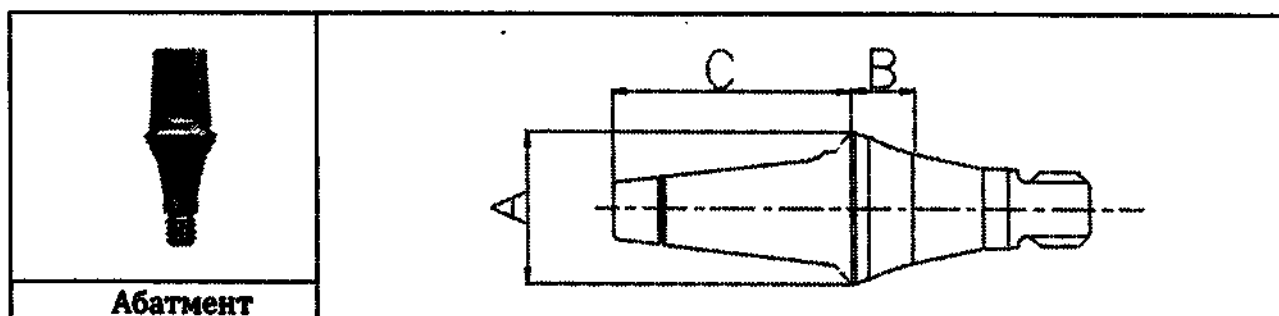


• **Защитный колпачок Rigid**

Защитный колпачок Rigid имеет форму крышки и используется для защиты верхней структуры, которая уже была сделана во время стоматологической операции.

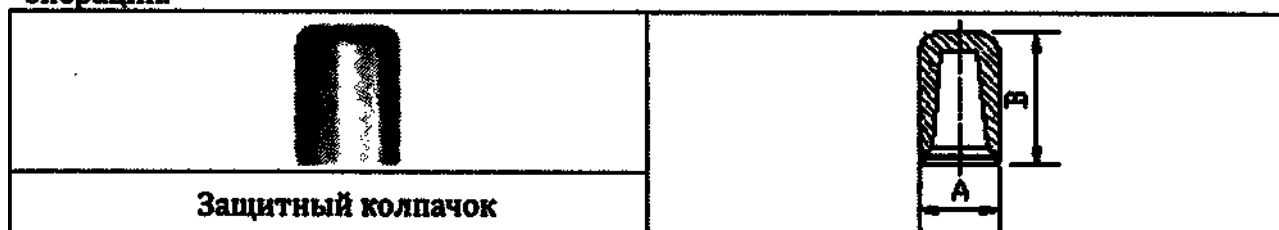


2. Абатмент Transfer

Абатмент Transfer используется для единичной реставрации в виде коронки и моста. Используется для изготовления общего цементного протеза. Он имеет 11° конусное соединение для безупречной прочности, золотой цвет в области шейки для эстетического эффекта и поперечное сечение для предотвращения вращения протеза.

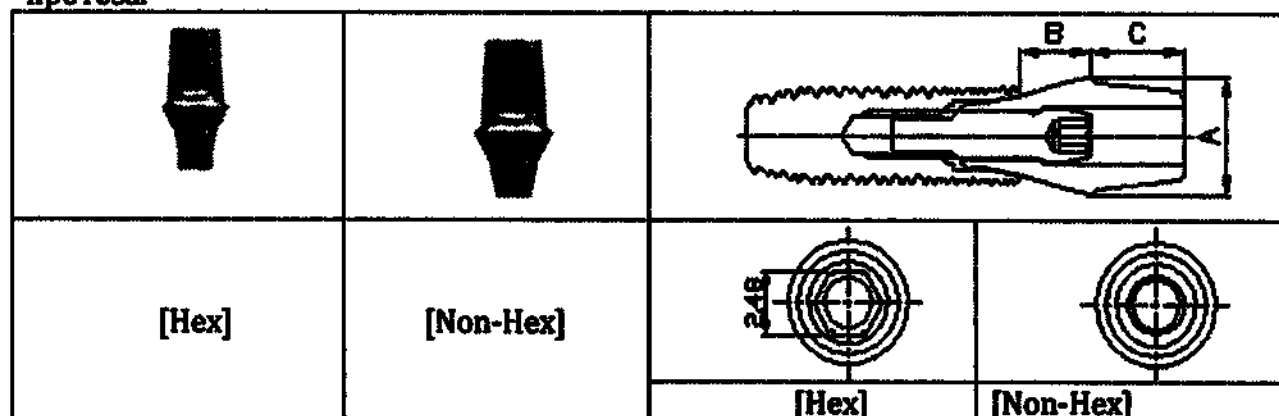


• **Винт-заглушка EbonyGold**

Винт-заглушка EbonyGold используется для привинчивания абатмента к имплантату.

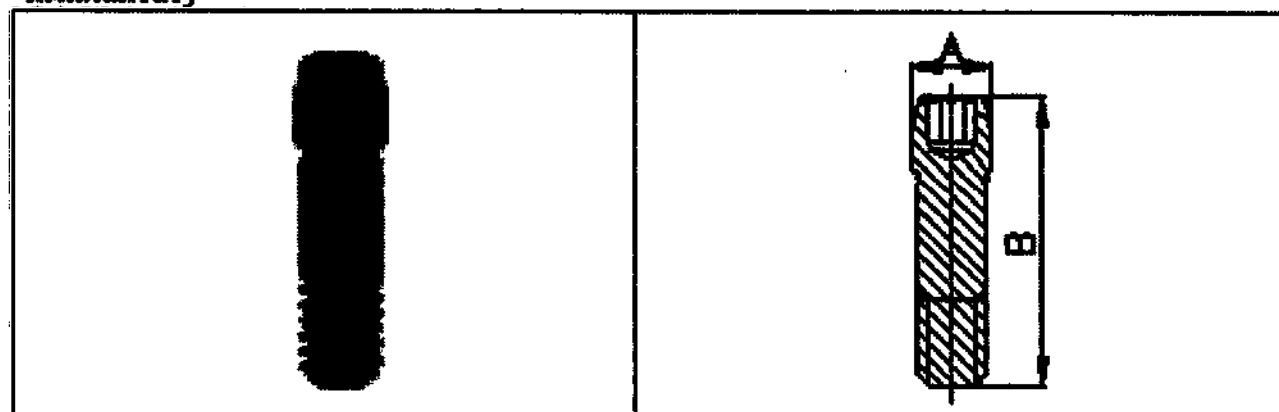


3. Абатмент Angled

Абатмент Angled - это абатмент, который имеет определенный угол, чтобы облегчить настройку установки угла протеза.

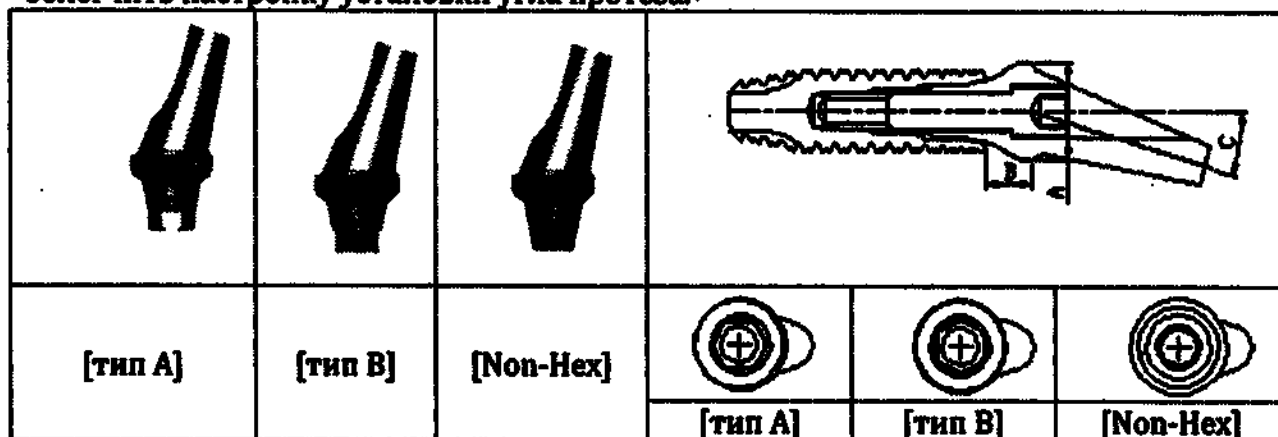


• **Винт-заглушка EbonyGold**


Винт-заглушка EbonyGold Screw используется для привинчивания абатмента к имплантату

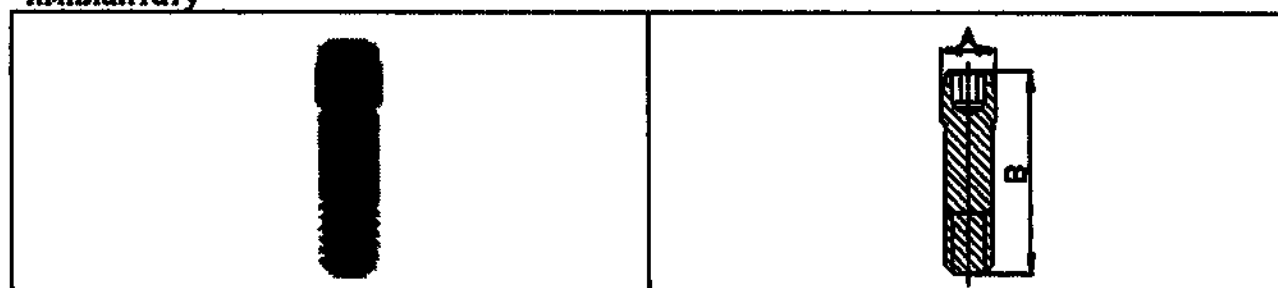

4. Абатмент FreeForm ST

Абатмент FreeForm ST используется для единичной реставрации в виде коронки и моста и используется для простых протезов, потому что их особенность - это цементированный абатмент, который дает преимущество для создания протеза и имеет широкий пограничный участок.

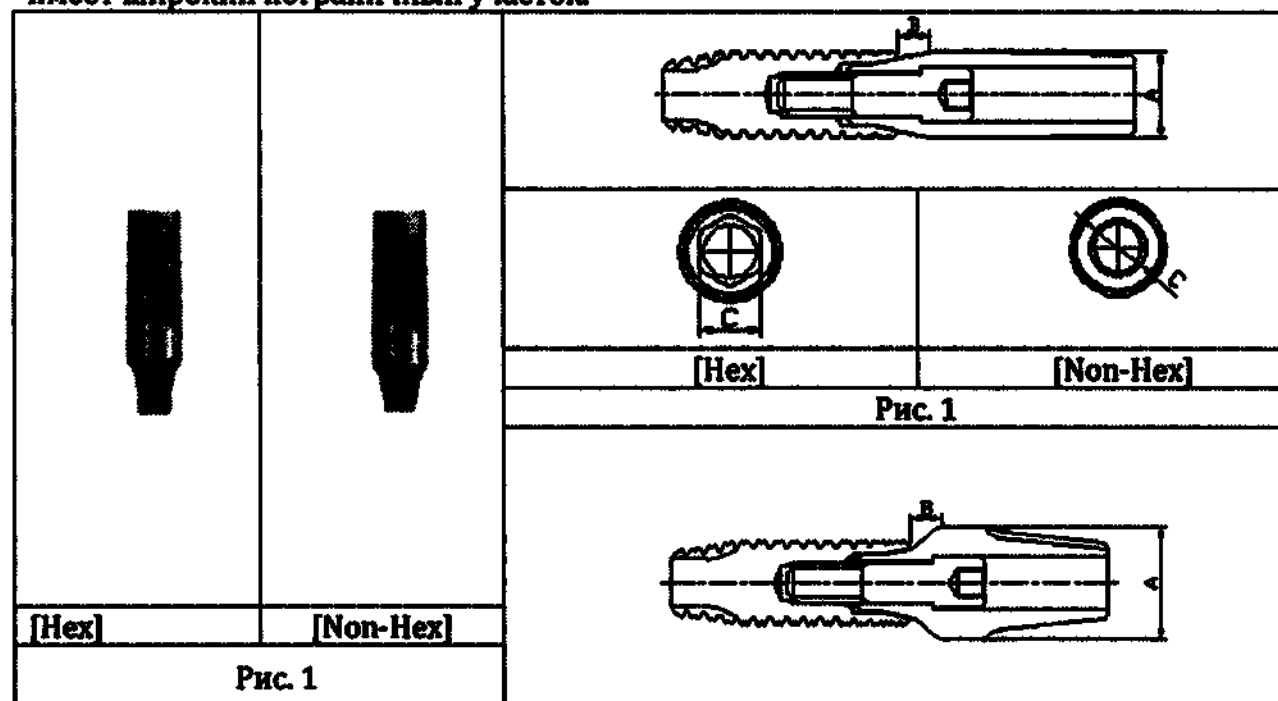

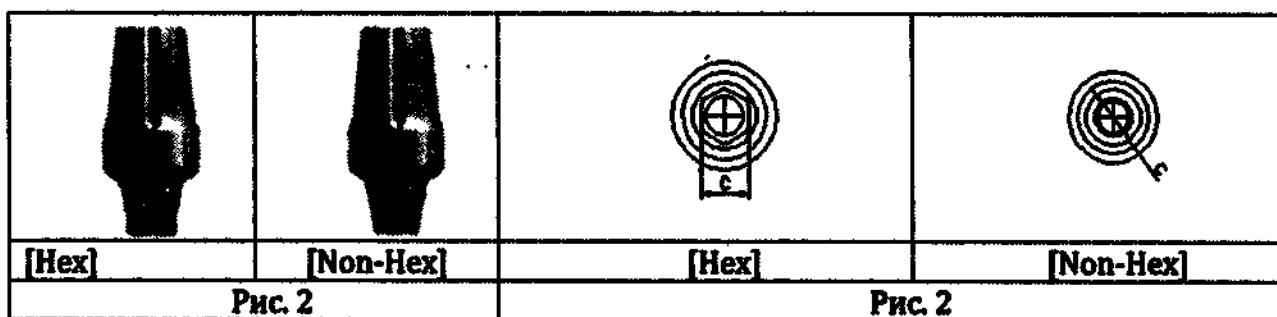


• **Винт-заглушка EbonyGold**

Винт-заглушка EbonyGold используется для привинчивания абатмента к имплантату



5. Абатмент GoldCast

Абатмент GoldCast представляет собой абатмент с имплантатом винтом-заглушкой, который фиксирует протез с помощью Винта фиксации абатмента и изготавливается путем прямой отливки с использованием золотого сплава.

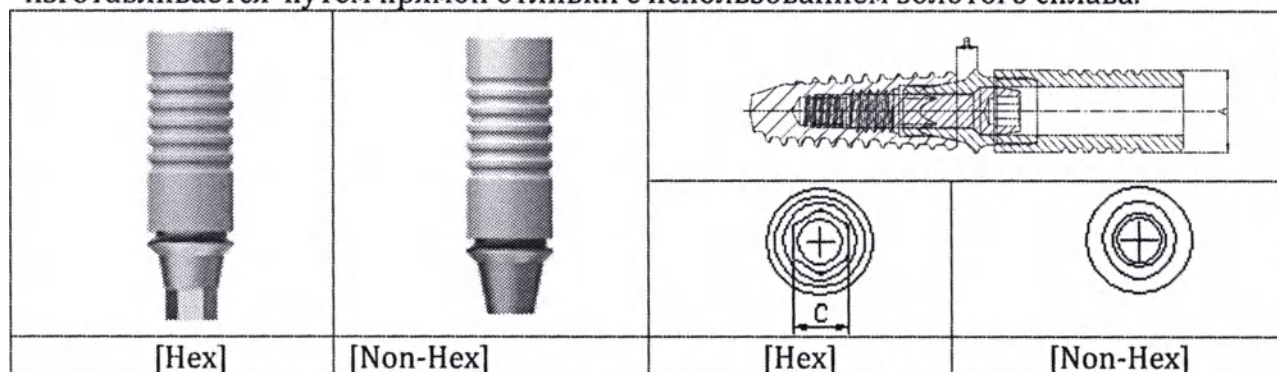


• **Винт-заглушка EbonyGold**

Винт-заглушка EbonyGold используется для привинчивания абатмента к имплантату




6. Абатмент NP-CAST

Абатмент NP-Cast применяется в изготовлении протеза имплантата при помощи недорогих металлов

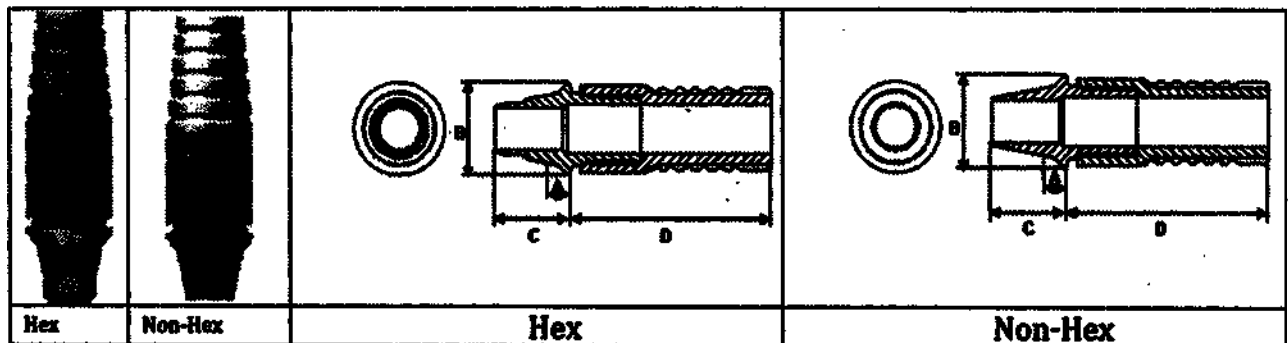


• **Винт-заглушка EbonyGold**

Винт-заглушка EbonyGold используется для привинчивания абатмента к имплантату

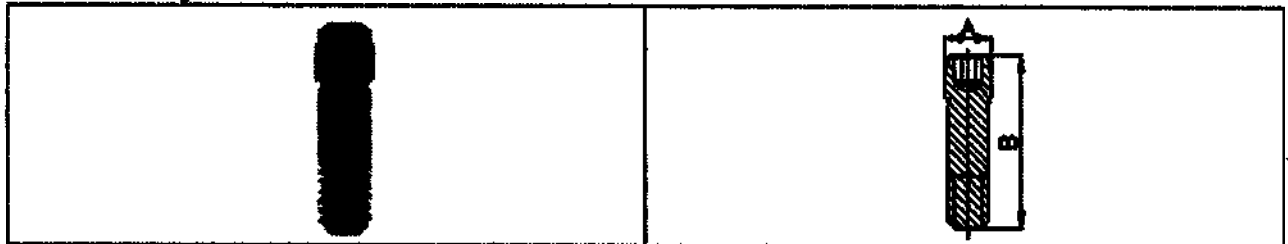


7. Абатмент ZioCera

Абатмент ZioCera выполнен из циркония и имеет натуральный цвет зуба. И затем он используется для особо эстетического протеза.

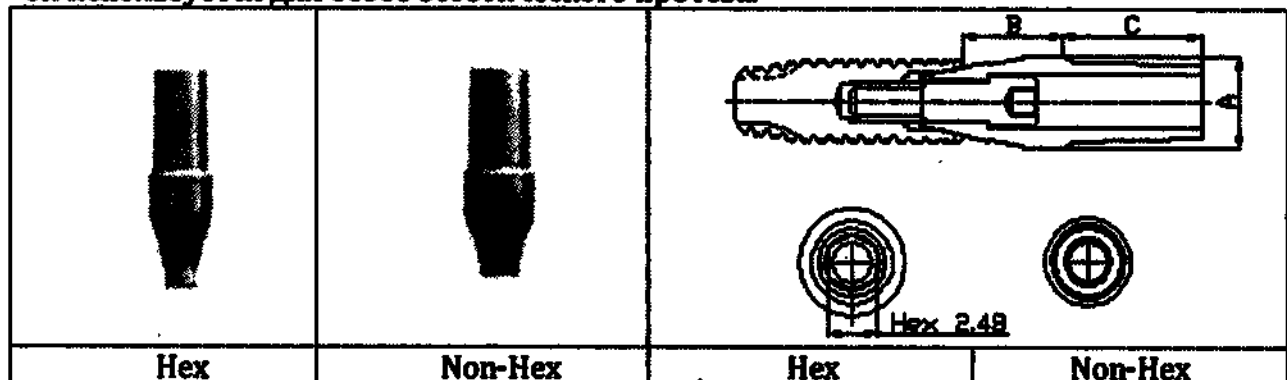

• **Винт-заглушка EbonyGold**


Винт-заглушка EbonyGold используется для привинчивания абатмента к имплантату

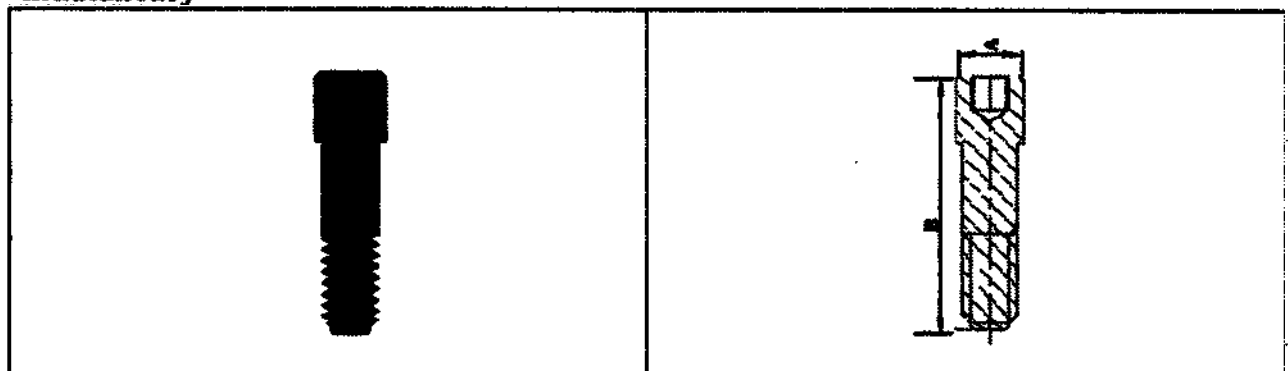

8. Абатмент ZioCera Angled


Абатмент ZioCera Angled выполнен из циркония и имеет натуральный цвет зуба, а затем используется для особо эстетического протеза. Абатмент ZioCera Angled - это абатмент, который имеет определенный угол, облегчающий настройку установки угла протеза.

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

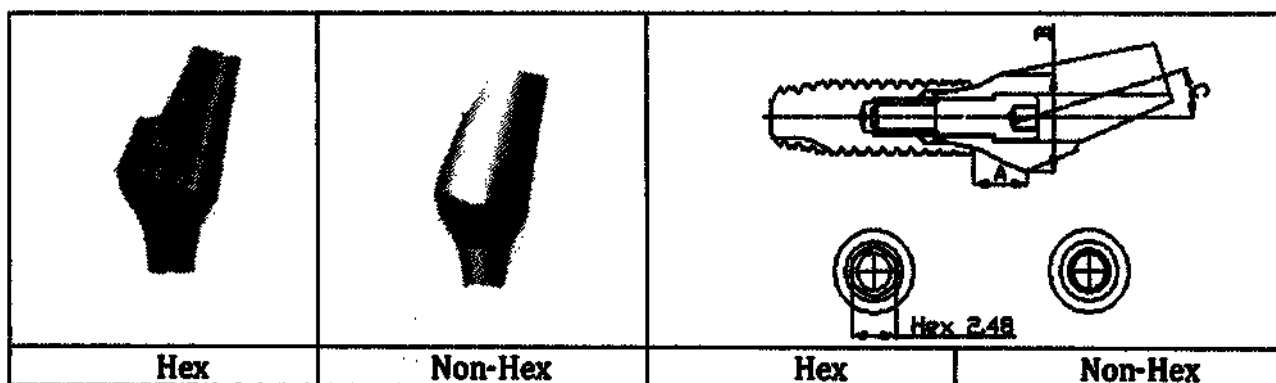


• **Винт-заглушка EbonyGold**

Винт-заглушка EbonyGold используется для привинчивания абатмента к имплантату

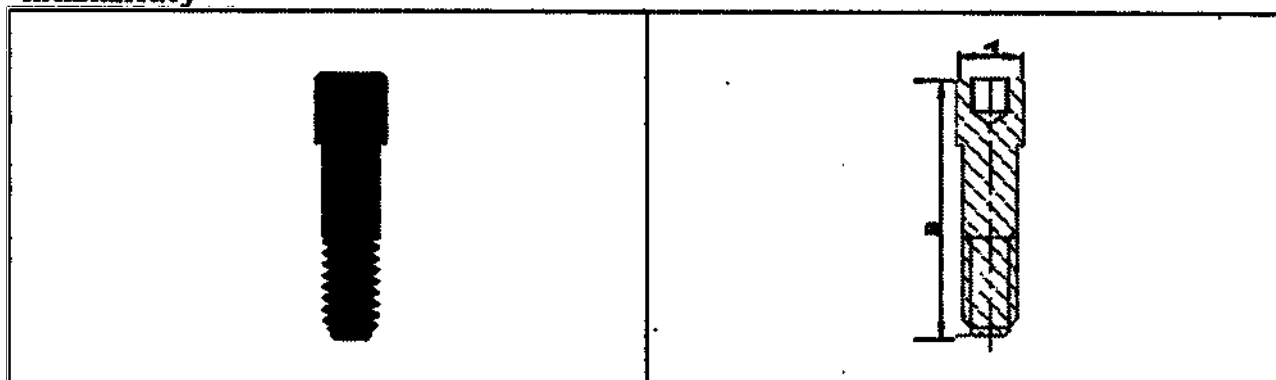


9. Абатмент Tempogary

Абатмент Tempogary используется временно, пока не будет сделан окончательный протез для поддержания эстетической оценки и способности к жеванию.

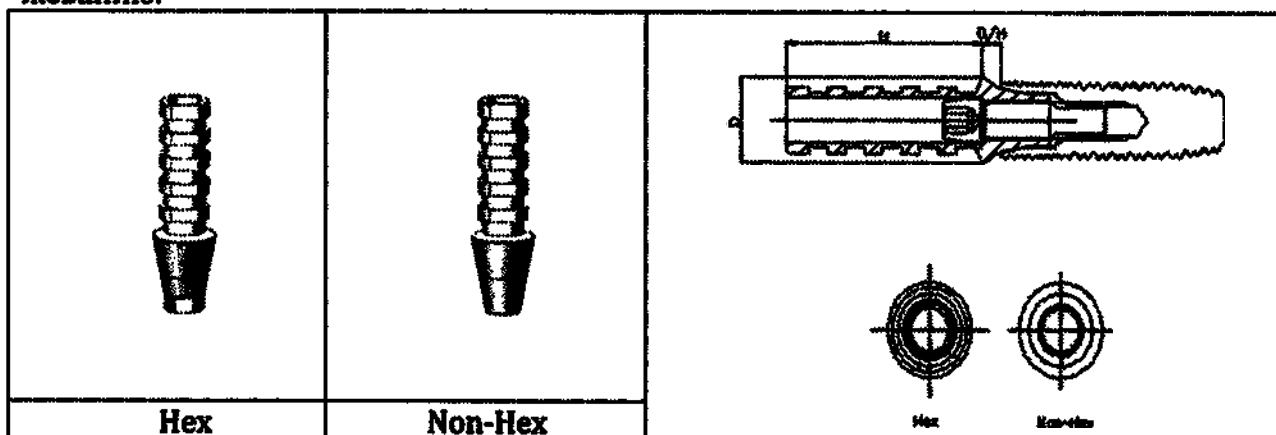


• **Титановый Винт-заглушка**

Титановый Винт-заглушка используется для привинчивания абатмента к имплантату

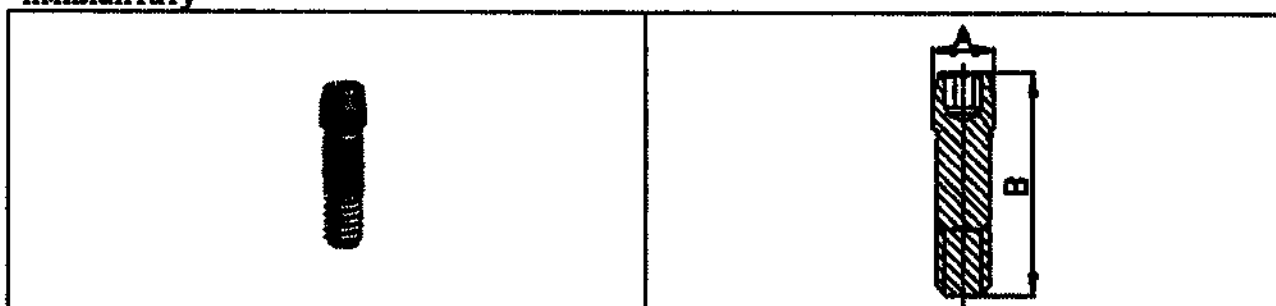


10. Абатмент Quick Tempora

Абатмент Quick Tempora используется временно до тех пор, пока не будет сделан окончательный протез для поддержания эстетической оценки и способности к жеванию.

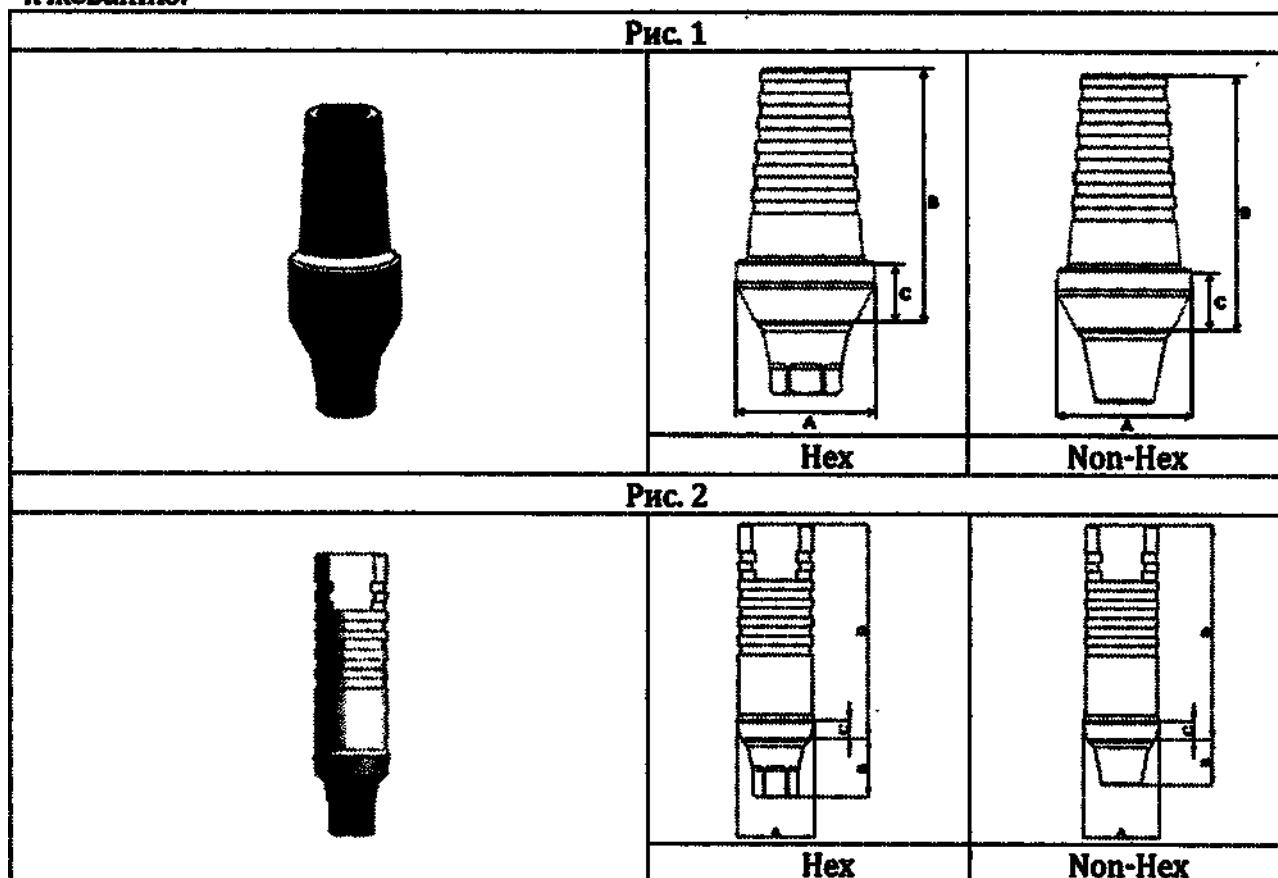


• **Титановый Винт-заглушка**

Титановый Винт-заглушка используется для привинчивания абатмента к имплантату

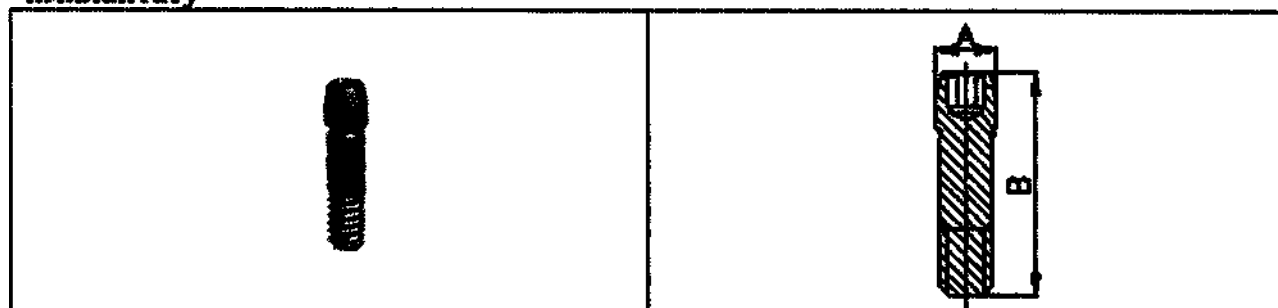
**11. Абатмент Multi**

Если несколько имплантатов были имплантированы в кость нижней челюсти для создания полного зубного протеза, некоторые из приспособлений должны быть наклонены. Используйте Носитель Абатментов Multi для соединения с имплантатом

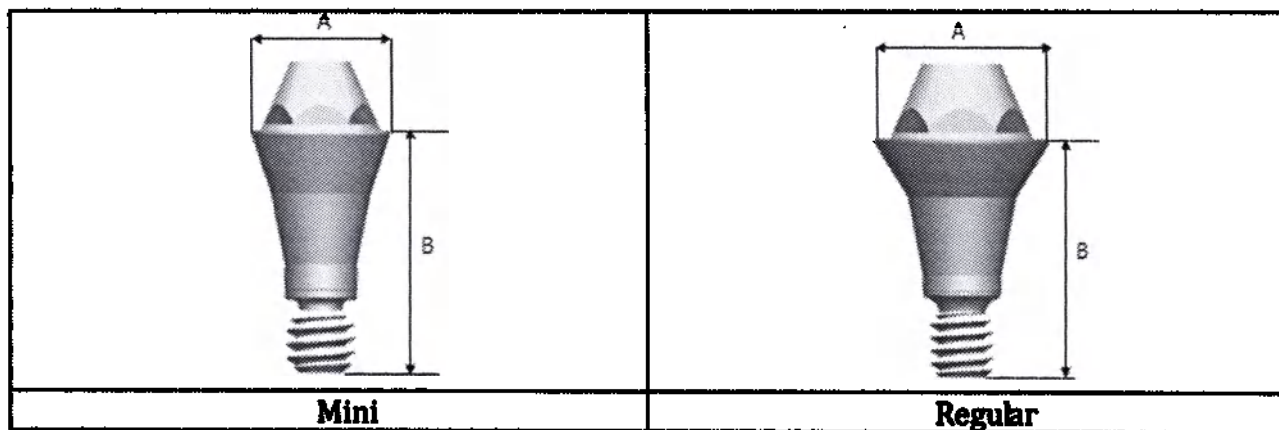


• **Носитель Абатментов Multi**

Предназначен для легкого переноса абатмента Multi.

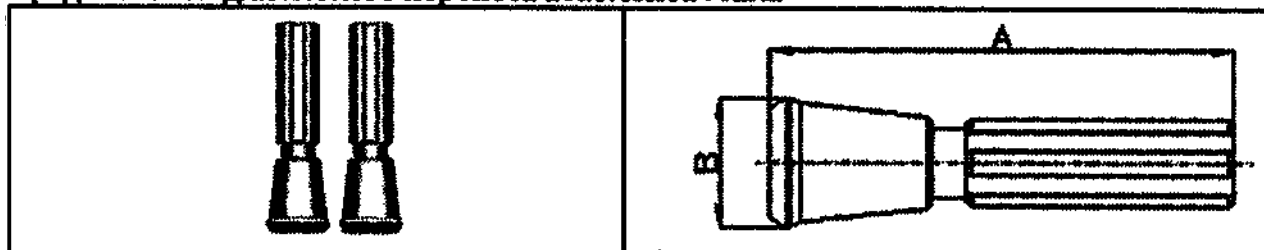


12. Абатмент Multi Angled

Если несколько имплантов были имплантированы в кость нижней челюсти для создания полного протеза, некоторые из приспособлений должны быть наклонены. В этом случае абатмент Multi Angled используется для регулировки направления протеза.

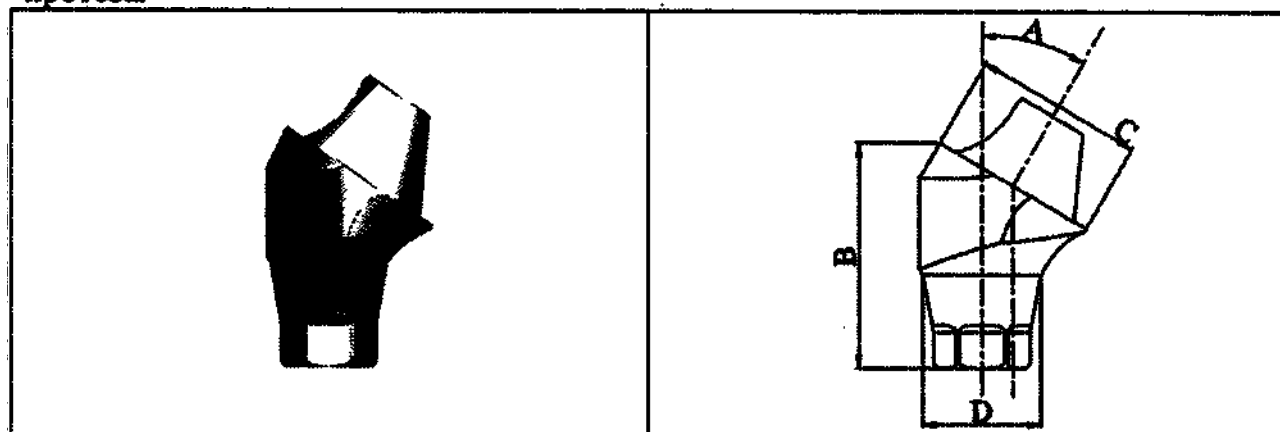


• **Винт-заглушка EbonyGold**

Винт-заглушка EbonyGold используется для привинчивания абатмента к имплантату

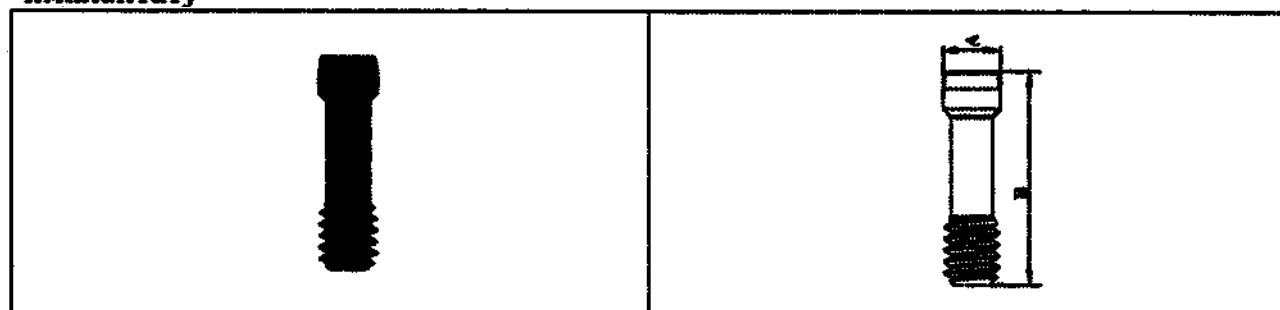


• **Носитель Абатментов Multi Angled**

Предназначен для легкого переноса абатмента Multi Angled.

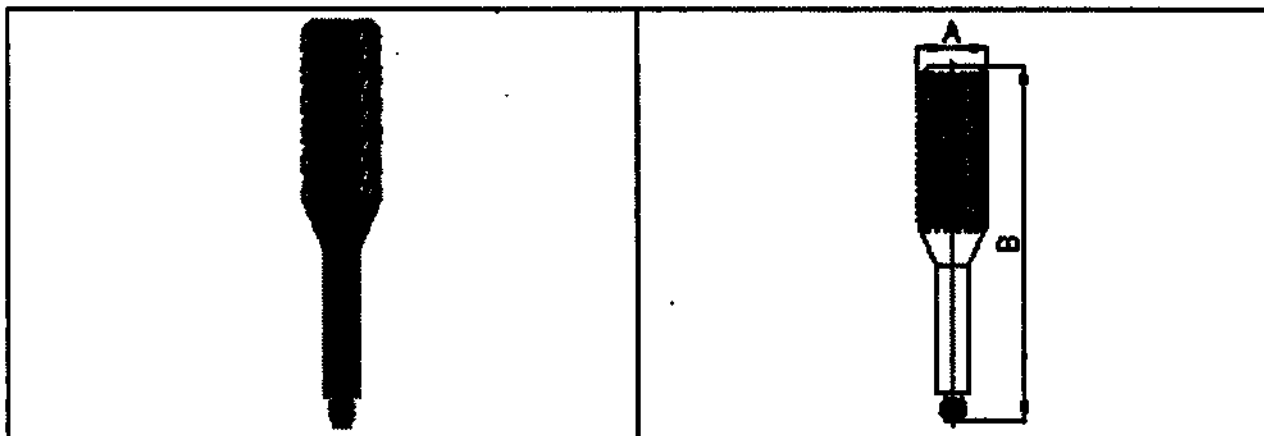


13. Абатмент Convertible

Абатмент Convertible является абатментом для минимизации ослабления Винта-заглушки во время протезирования.

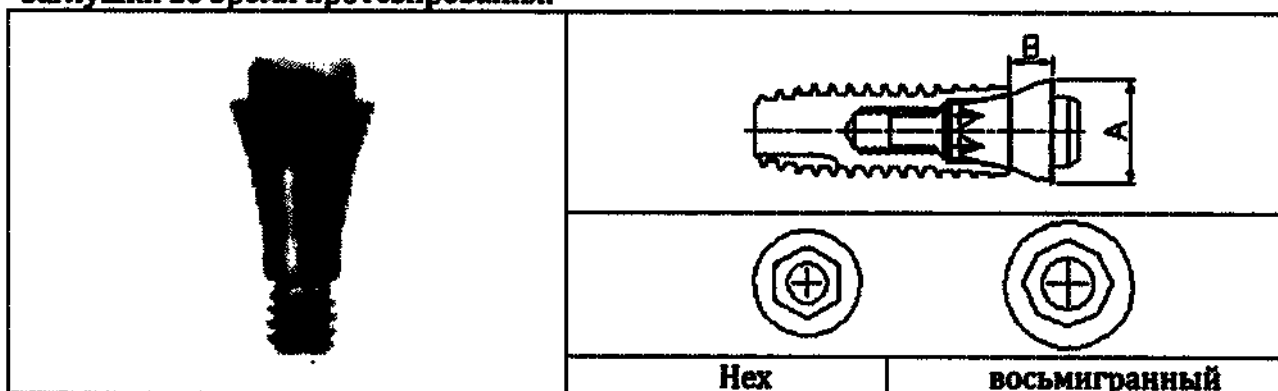


• Носитель Абатментов Convertible

Предназначен для легкого переноса абатмента Convertible.

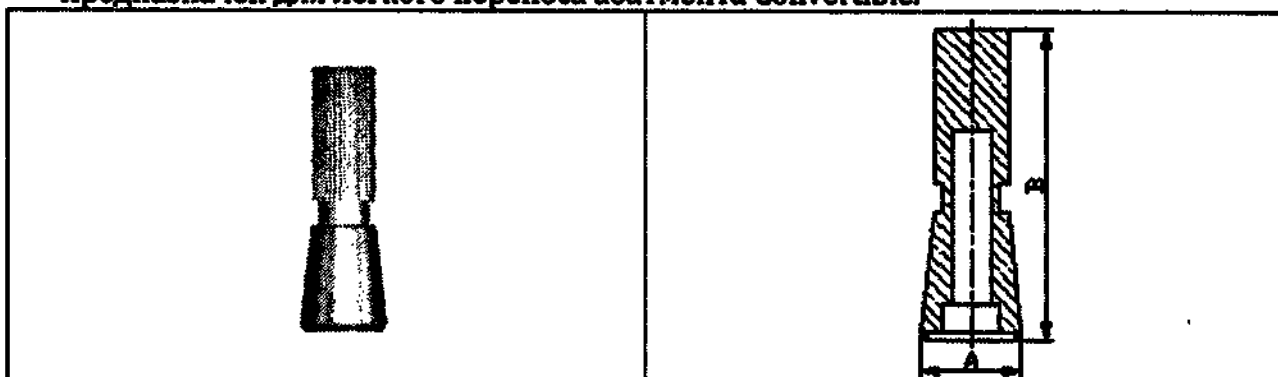


14. Абатмент Stud

Абатмент Stud используется для прикрепления полного протеза в случае пациента, у которого нет зубов, после работы с частичными вспомогательными материалами на десневой кости.

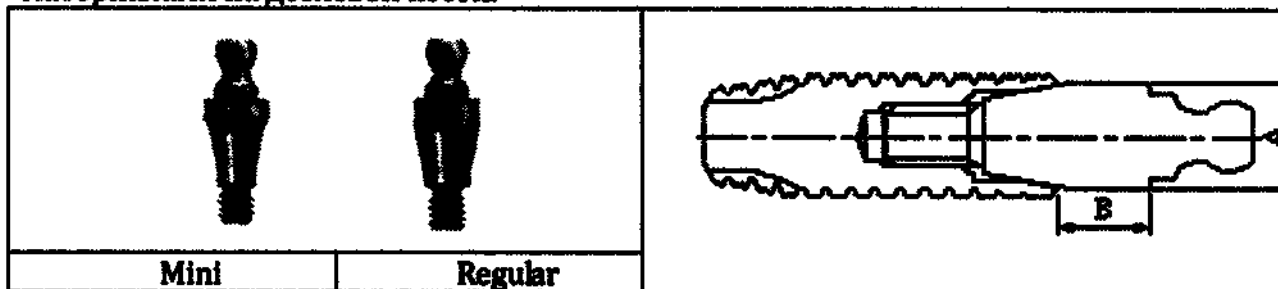

15. Абатмент Port Angled

Используется для компенсации хода имплантата в случае многочисленной винтовой фиксации.

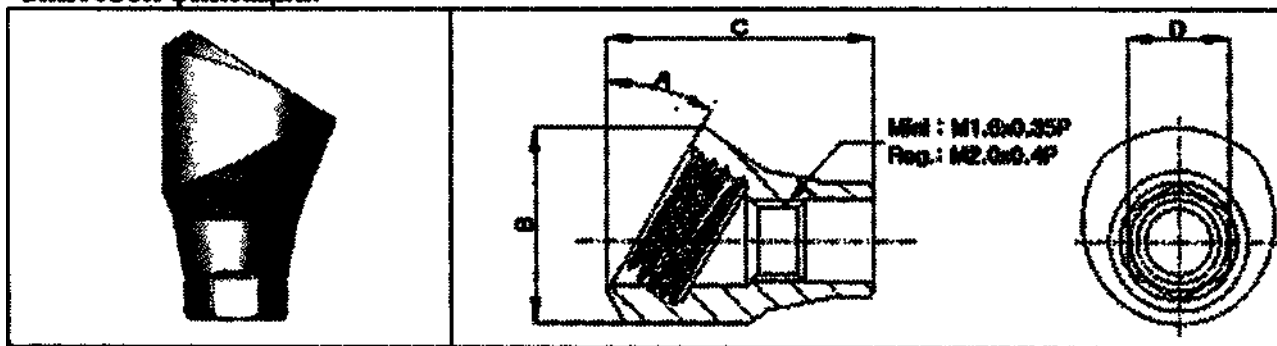

• **Винт-заглушка EbonyGold**


Винт-заглушка EbonyGold используется для привинчивания абатмента к имплантату



2. Основные параметры и характеристики медицинского оборудования (основанные на измерениях, технические характеристики оборудования для диагностики в лабораторных условиях, срок службы, срок годности)

1. Абатмент Rigid

Единица: мм

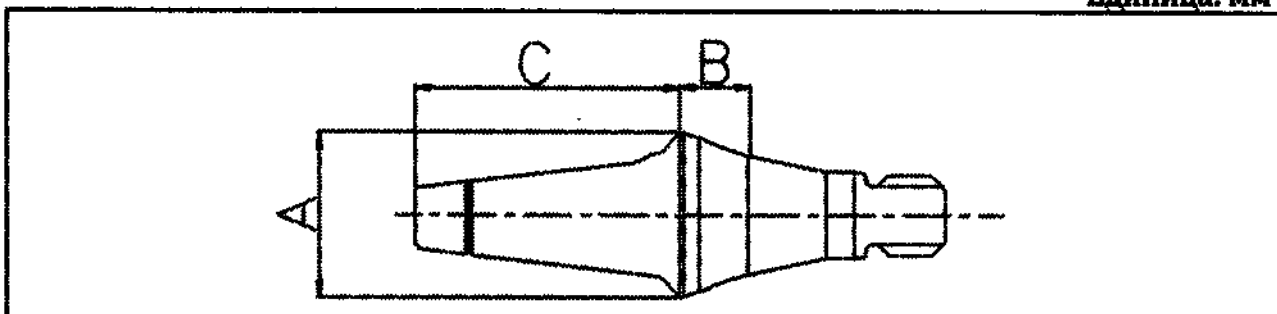

Абатмент Rigid представлен в диапазоне размеров: 4,0-7,0 мм (Ø); 1,0-5,0 мм (G/H); 4,0-7,0 мм (H), и в двух вариантах: Mini или Regular.

GSRA4410	4.0	1.0	4.0	10	1.97	0.4	1.8	0.22	Mini
GSRA4420	4.0	2.0	4.0	11	1.97	0.4	1.8	0.26	Mini
GSRA4430	4.0	3.0	4.0	12	1.97	0.4	1.8	0.31	Mini
GSRA4440	4.0	4.0	4.0	13	1.97	0.4	1.8	0.34	Mini
GSRA4450	4.0	5.0	4.0	14	1.97	0.4	1.8	0.38	Mini
GSRA4451	4.6	1.0	4.0	14	1.97	0.4	1.8	0.49	Mini
GSRA4610	4.0	1.0	5.5	11.5	1.97	0.4	1.8	0.24	Mini

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSRA4620	4.0	2.0	5.5	12.5	1.97	0.4	1.8	0.28	Mini
GSRA4630	4.0	3.0	5.5	13.5	1.97	0.4	1.8	0.32	Mini
GSRA4640	4.0	4.0	5.5	14.5	1.97	0.4	1.8	0.36	Mini
GSRA4650	4.0	5.0	5.5	15.5	1.97	0.4	1.8	0.41	Mini
GSRA4651	4.6	5.0	5.5	15.5	1.97	0.4	1.8	0.54	Mini
GSRA4710	4.0	1.0	7.0	13	1.97	0.4	1.8	0.26	Mini
GSRA4720	4.0	2.0	7.0	14	1.97	0.4	1.8	0.3	Mini
GSRA4730	4.0	3.0	7.0	15	1.97	0.4	1.8	0.34	Mini
GSRA4740	4.0	4.0	7.0	16	1.97	0.4	1.8	0.38	Mini
GSRA4750	4.0	5.0	7.0	17	1.97	0.4	1.8	0.42	Mini
GSRA4751	4.6	5.0	7.0	17	1.97	0.4	1.8	0.54	Mini
GSRA4411	4.6	1.0	4.0	10	1.97	0.4	1.8	0.29	Mini
GSRA4421	4.6	2.0	4.0	11	1.97	0.4	1.8	0.34	Mini
GSRA4431	4.6	3.0	4.0	12	1.97	0.4	1.8	0.4	Mini
GSRA4441	4.6	4.0	4.0	13	1.97	0.4	1.8	0.44	Mini
GSRA4611	4.6	1.0	5.5	11.5	1.97	0.4	1.8	0.34	Mini
GSRA4621	4.6	2.0	5.5	12.5	1.97	0.4	1.8	0.39	Mini
GSRA4631	4.6	3.0	5.5	13.5	1.97	0.4	1.8	0.45	Mini
GSRA4641	4.6	4.0	5.5	14.5	1.97	0.4	1.8	0.48	Mini
GSRA4711	4.6	1.0	7.0	13	1.97	0.4	1.8	0.34	Mini
GSRA4721	4.6	2.0	7.0	14	1.97	0.4	1.8	0.39	Mini
GSRA4731	4.6	3.0	7.0	15	1.97	0.4	1.8	0.44	Mini
GSRA4741	4.6	4.0	7.0	16	1.97	0.4	1.8	0.39	Mini
GSRAS4410	4.0	1.0	4.0	10.4	1.97	0.4	2.0	0.26	Reg
GSRAS4420	4.0	2.0	4.0	11.4	1.97	0.4	2.0	0.31	Reg
GSRAS4430	4.0	3.0	4.0	12.4	1.97	0.4	2.0	0.36	Reg
GSRAS4440	4.0	4.0	4.0	13.4	1.97	0.4	2.0	0.4	Reg
GSRAS4450	4.0	5.0	4.0	14.4	1.97	0.4	2.0	0.45	Reg
GSRAS4451	4.6	5.0	4.0	14.4	1.97	0.4	2.0	0.56	Reg
GSRAS4610	4.0	1.0	5.5	11.9	1.97	0.4	2.0	0.28	Reg
GSRAS4620	4.0	2.0	5.5	12.9	1.97	0.4	2.0	0.33	Reg
GSRAS4630	4.0	3.0	5.5	13.9	1.97	0.4	2.0	0.38	Reg
GSRAS4640	4.0	4.0	5.5	14.9	1.97	0.4	2.0	0.42	Reg
GSRAS4650	4.0	5.0	5.5	15.9	1.97	0.4	2.0	0.47	Reg
GSRAS4651	4.6	5.0	5.5	15.9	1.97	0.4	2.0	0.61	Reg
GSRAS4710	4.0	1.0	7.0	13.4	1.97	0.4	2.0	0.3	Reg
GSRAS4720	4.0	2.0	7.0	14.4	1.97	0.4	2.0	0.35	Reg
GSRAS4730	4.0	3.0	7.0	15.4	1.97	0.4	2.0	0.4	Reg
GSRAS4740	4.0	4.0	7.0	16.4	1.97	0.4	2.0	0.44	Reg
GSRAS4750	4.0	5.0	7.0	17.4	1.97	0.4	2.0	0.49	Reg
GSRAS4751	4.0	5.0	7.0	17.4	1.97	0.4	2.0	0.66	Reg
GSRAS4411	4.6	1.0	4.0	10.4	1.97	0.4	2.0	0.33	Reg
GSRAS4421	4.6	2.0	4.0	11.4	1.97	0.4	2.0	0.39	Reg
GSRAS4431	4.6	3.0	4.0	12.4	1.97	0.4	2.0	0.45	Reg
GSRAS4441	4.6	4.0	4.0	13.4	1.97	0.4	2.0	0.5	Reg
GSRAS4611	4.6	1.0	5.5	11.5	1.97	0.4	2.0	0.38	Reg
GSRAS4621	4.6	2.0	5.5	12.5	1.97	0.4	2.0	0.44	Reg
GSRAS4631	4.6	3.0	5.5	13.5	1.97	0.4	2.0	0.5	Reg


Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSRAS4641	4.6	4.0	5.5	14.5	1.97	0.4	2.0	0.55	Reg
GSRAS4711	4.6	1.0	7.0	13	1.97	0.4	2.0	0.43	Reg
GSRAS4721	4.6	2.0	7.0	14	1.97	0.4	2.0	0.49	Reg
GSRAS4731	4.6	3.0	7.0	15	1.97	0.4	2.0	0.55	Reg
GSRAS4741	4.6	4.0	7.0	16	1.97	0.4	2.0	0.6	Reg
GSRA5410	5.0	1.0	4.0	10.4	1.97	0.4	2.0	0.38	Reg
GSRA5420	5.0	2.0	4.0	11.4	1.97	0.4	2.0	0.45	Reg
GSRA5430	5.0	3.0	4.0	12.4	1.97	0.4	2.0	0.51	Reg
GSRA5440	5.0	4.0	4.0	13.4	1.97	0.4	2.0	0.57	Reg
GSRA5450	5.0	5.0	4.0	14.4	1.97	0.4	2.0	0.63	Reg
GSRA5610	5.0	1.0	5.5	11.9	1.97	0.4	2.0	0.45	Reg
GSRA5620	5.0	2.0	5.5	12.9	1.97	0.4	2.0	0.5	Reg
GSRA5630	5.0	3.0	5.5	13.9	1.97	0.4	2.0	0.56	Reg
GSRA5640	5.0	4.0	5.5	14.9	1.97	0.4	2.0	0.62	Reg
GSRA5650	5.0	5.0	5.5	15.9	1.97	0.4	2.0	0.7	Reg
GSRA5710	5.0	1.0	7.0	13.4	1.97	0.4	2.0	0.5	Reg
GSRA5720	5.0	2.0	7.0	14.4	1.97	0.4	2.0	0.56	Reg
GSRA5730	5.0	3.0	7.0	15.4	1.97	0.4	2.0	0.63	Reg
GSRA5740	5.0	4.0	7.0	16.4	1.97	0.4	2.0	0.69	Reg
GSRA5750	5.0	5.0	7.0	17.4	1.97	0.4	2.0	0.75	Reg
GSRA6410	6.0	1.0	4.0	10.4	1.97	0.4	2.0	0.5	Reg
GSRA6420	6.0	2.0	4.0	11.4	1.97	0.4	2.0	0.58	Reg
GSRA6430	6.0	3.0	4.0	12.4	1.97	0.4	2.0	0.66	Reg
GSRA6440	6.0	4.0	4.0	13.4	1.97	0.4	2.0	0.74	Reg
GSRA6450	6.0	5.0	4.0	14.4	1.97	0.4	2.0	0.81	Reg
GSRA6610	6.0	1.0	5.5	11.9	1.97	0.4	2.0	0.6	Reg
GSRA6620	6.0	2.0	5.5	12.9	1.97	0.4	2.0	0.67	Reg
GSRA6630	6.0	3.0	5.5	13.9	1.97	0.4	2.0	0.74	Reg
GSRA6640	6.0	4.0	5.5	14.9	1.97	0.4	2.0	0.81	Reg
GSRA6650	6.0	5.0	5.5	15.9	1.97	0.4	2.0	0.91	Reg
GSRA6710	6.0	1.0	7.0	13.4	1.97	0.4	2.0	0.68	Reg
GSRA6720	6.0	2.0	7.0	14.4	1.97	0.4	2.0	0.76	Reg
GSRA6730	6.0	3.0	7.0	15.4	1.97	0.4	2.0	0.84	Reg
GSRA6740	6.0	4.0	7.0	16.4	1.97	0.4	2.0	0.91	Reg
GSRA6750	6.0	5.0	7.0	17.4	1.97	0.4	2.0	0.99	Reg
GSRA7610	7.0	1.0	5.5	11.9	1.97	0.4	2.0	0.74	Reg
GSRA7620	7.0	2.0	5.5	12.9	1.97	0.4	2.0	0.84	Reg
GSRA7630	7.0	3.0	5.5	13.9	1.97	0.4	2.0	0.94	Reg
GSRA7640	7.0	4.0	5.5	14.9	1.97	0.4	2.0	1.03	Reg
GSRA7650	7.0	5.0	5.5	15.9	1.97	0.4	2.0	1.13	Reg

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 30 Нсм

• Защитный колпачок Rigid

Единица: мм

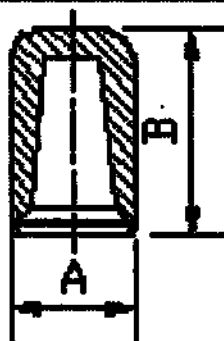


Защитный колпачок Rigid представлен в диапазоне размеров: 4,4-7,4 мм (A); 5,5-8,8 мм (B).

GSRPC440	4.4	5.7	4.65(±0.05)	3.04	0.06
GSRPC460	4.4	7.2	6.15	3.04	0.08
GSRPC470	4.4	8.7	7.65	3.04	0.11
GSRPC441	5.0	5.5	4.65(±0.05)	3.94	0.06
GSRPC461	5.0	7.0	6.15	3.94	0.08
GSRPC471	5.0	8.5	7.65	3.94	0.1
GSRPC540	5.5	5.9	4.85(±0.05)	4.54	0.08
GSRPC560	5.5	7.3	6.15	4.54	0.1
GSRPC570	5.5	8.8	7.65	4.54	0.13
GSRPC640	6.6(±0.1)	5.9	4.75	5.32(+0.05,-0.01)	0.12
GSRPC660	6.6(±0.1)	7.3	6.15	5.32(+0.05,-0.01)	0.15
GSRPC670	6.6(±0.1)	8.8	7.65	5.32(+0.05,-0.01)	0.19
GSRPC760	7.4(±0.1)	7.0	6.0	6.14	0.16

2. Абатмент Transfer

Единица: мм

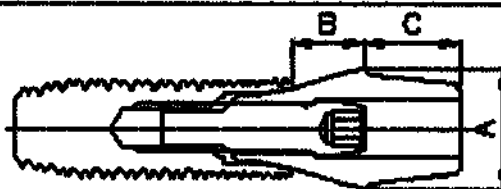

Hex



Non-Hex

Абатмент Transfer представлен в диапазоне размеров: 4,0-7,0 мм (Ø); 1,0-7,0 мм (G/H); 4,0-7,0 мм (H), и в вариантах: Mini или Regular, Hex или Non-Hex.

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSTA4611	4.6	1	5.5	Hex	Mini	9.1	1.67	2.3	0.21
GSTA4612	4	1	5.5	Hex	Mini	9.1	1.59	2.25	0.17
GSTA4621	4.6	2	5.5	Hex	Mini	10.1	1.67	2.3	0.24
GSTA4622	4	2	5.5	Hex	Mini	10.1	1.59	2.25	0.19
GSTA4631	4.6	3	5.5	Hex	Mini	11.1	1.67	2.3	0.27
GSTA4632	4	3	5.5	Hex	Mini	11.1	1.59	2.25	0.22
GSTA4641	4.6	4	5.5	Hex	Mini	12.1	1.67	2.3	0.3
GSTA4642	4	4	5.5	Hex	Mini	12.1	1.59	2.25	0.24
GSTA4651	4.6	5	5.5	Hex	Mini	13.1	1.67	2.3	0.33
GSTA4652	4	5	5.5	Hex	Mini	13.1	1.59	2.25	0.27
GSTA4661	4.6	6	5.5	Hex	Mini	14.1	1.67	2.3	0.37
GSTA4662	4	6	5.5	Hex	Mini	14.1	1.59	2.25	0.29
GSTA4671	4.6	7	5.5	Hex	Mini	15.1	1.67	2.3	0.39
GSTA4672	4	7	5.5	Hex	Mini	15.1	1.59	2.25	0.34
GSTA4711	4.6	1	7	Hex	Mini	10.6	1.67	2.3	0.23
GSTA4712	4	1	7	Hex	Mini	10.6	1.59	2.25	0.19
GSTA4721	4.6	2	7	Hex	Mini	11.6	1.67	2.3	0.27
GSTA4722	4	2	7	Hex	Mini	11.6	1.59	2.25	0.21
GSTA4731	4.6	3	7	Hex	Mini	12.6	1.67	2.3	0.3
GSTA4732	4	3	7	Hex	Mini	12.6	1.59	2.25	0.24
GSTA4741	4.6	4	7	Hex	Mini	13.6	1.67	2.3	0.33
GSTA4742	4	4	7	Hex	Mini	13.6	1.59	2.25	0.26
GSTA4751	4.6	5	7	Hex	Mini	14.6	1.67	2.3	0.36
GSTA4752	4	5	7	Hex	Mini	14.6	1.59	2.25	0.29
GSTA4761	4.6	6	7	Hex	Mini	15.6	1.67	2.3	0.39
GSTA4762	4	6	7	Hex	Mini	15.6	1.59	2.25	0.31
GSTA4771	4.6	7	7	Hex	Mini	16.6	1.67	2.3	0.42
GSTA4772	4	7	7	Hex	Mini	16.6	1.59	2.25	0.34
GSTA5410	5	1	4	Hex	Reg	7.5	2.02	2.4	0.24
GSTA5420	5	2	4	Hex	Reg	8.5	2.02	2.4	0.28
GSTA5430	5	3	4	Hex	Reg	9.5	2.02	2.4	0.33
GSTA5440	5	4	4	Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.37
GSTA5450	5	5	4	Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.41
GSTA5460	5	6	4	Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.45
GSTA5470	5	7	4	Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.49
GSTA5610	5	1	5.5	Hex	Reg	9.0	2.02	2.4	0.27
GSTA5620	5	2	5.5	Hex	Reg	10.0	2.02	2.4	0.31
GSTA5630	5	3	5.5	Hex	Reg	11.0	2.02	2.4	0.35
GSTA5640	5	4	5.5	Hex	Reg	12.0	2.02	2.4	0.39
GSTA5650	5	5	5.5	Hex	Reg	13.0	2.02	2.4	0.44
GSTA5660	5	6	5.5	Hex	Reg	14.0	2.02	2.4	0.49
GSTA5670	5	7	5.5	Hex	Reg	15.0	2.02	2.4	0.53
GSTA5710	5	1	7	Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.3
GSTA5720	5	2	7	Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.34
GSTA5730	5	3	7	Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.39
GSTA5740	5	4	7	Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.42
GSTA5750	5	5	7	Hex	Reg	14.5	2.02	2.4	0.47

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSTA5760	5	6	7	Hex	Reg	15.5	2.02	2.4	0.51
GSTA5770	5	7	7	Hex	Reg	16.5	2.02	2.4	0.55
GSTA6410	6	1	4	Hex	Reg	7.5	2.02	2.4	0.36
GSTA6420	6	2	4	Hex	Reg	8.5	2.02	2.4	0.42
GSTA6430	6	3	4	Hex	Reg	9.5	2.02	2.4	0.48
GSTA6440	6	4	4	Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.53
GSTA6450	6	5	4	Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.59
GSTA6460	6	6	4	Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.65
GSTA6470	6	7	4	Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.71
GSTA6610	6	1	5.5	Hex	Reg	7.5	2.02	2.4	0.42
GSTA6620	6	2	5.5	Hex	Reg	8.5	2.02	2.4	0.47
GSTA6630	6	3	5.5	Hex	Reg	9.5	2.02	2.4	0.52
GSTA6640	6	4	5.5	Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.58
GSTA6650	6	5	5.5	Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.66
GSTA6660	6	6	5.5	Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.71
GSTA6670	6	7	5.5	Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.77
GSTA6710	6	1	7	Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.47
GSTA6720	6	2	7	Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.53
GSTA6730	6	3	7	Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.59
GSTA6740	6	4	7	Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.65
GSTA6750	6	5	7	Hex	Reg	14.5	2.02	2.4	0.71
GSTA6760	6	6	7	Hex	Reg	15.5	2.02	2.4	0.77
GSTA6770	6	7	7	Hex	Reg	16.5	2.02	2.4	0.82
GSTA7410	7	1	4	Hex	Reg	9.1	2.02	2.4	0.49
GSTA7420	7	2	4	Hex	Reg	10.1	2.02	2.4	0.56
GSTA7430	7	3	4	Hex	Reg	11.1	2.02	2.4	0.64
GSTA7440	7	4	4	Hex	Reg	12.1	2.02	2.4	0.7
GSTA7450	7	5	4	Hex	Reg	13.1	2.02	2.4	0.8
GSTA7460	7	6	4	Hex	Reg	14.1	2.02	2.4	0.88
GSTA7470	7	7	4	Hex	Reg	15.1	2.02	2.4	0.96
GSTA7610	7	1	5.5	Hex	Reg	9.0	2.02	2.4	0.59
GSTA7620	7	2	5.5	Hex	Reg	10.0	2.02	2.4	0.66
GSTA7630	7	3	5.5	Hex	Reg	11.0	2.02	2.4	0.74
GSTA7640	7	4	5.5	Hex	Reg	12.0	2.02	2.4	0.8
GSTA7650	7	5	5.5	Hex	Reg	13.0	2.02	2.4	0.9
GSTA7660	7	6	5.5	Hex	Reg	14.0	2.02	2.4	0.98
GSTA7670	7	7	5.5	Hex	Reg	15.0	2.02	2.4	1.06
GSTAS4611	4.6	1	5.5	Hex	Reg	9.0	2.02	2.4	0.21
GSTAS4621	4.6	2	5.5	Hex	Reg	10.0	2.02	2.4	0.25
GSTAS4631	4.6	3	5.5	Hex	Reg	11.0	2.02	2.4	0.28
GSTAS4641	4.6	4	5.5	Hex	Reg	12.0	2.02	2.4	0.31
GSTAS4651	4.6	5	5.5	Hex	Reg	13.0	2.02	2.4	0.36
GSTAS4661	4.6	6	5.5	Hex	Reg	14.0	2.02	2.4	0.4
GSTAS4671	4.6	7	5.5	Hex	Reg	15.0	2.02	2.4	0.43
GSTAS4711	4.6	1	7	Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.24
GSTAS4721	4.6	2	7	Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.27
GSTAS4731	4.6	3	7	Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.31
GSTAS4741	4.6	4	7	Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.35

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSTAS4751	4.6	5	7	Hex	Reg	14.5	2.02	2.4	0.38
GSTAS4761	4.6	6	7	Hex	Reg	15.5	2.02	2.4	0.42
GSTAS4771	4.6	7	7	Hex	Reg	16.5	2.02	2.4	0.42
GSTA4611N	4.6	1	5.5	Non-Hex	Mini	8.5	1.67	2.3	0.21
GSTA4612N	4	1	5.5	Non-Hex	Mini	8.5	1.59	2.25	0.17
GSTA4621N	4.6	2	5.5	Non-Hex	Mini	9.5	1.67	2.3	0.23
GSTA4622N	4	2	5.5	Non-Hex	Mini	9.5	1.59	2.25	0.2
GSTA4631N	4.6	3	5.5	Non-Hex	Mini	10.5	1.67	2.3	0.26
GSTA4632N	4	3	5.5	Non-Hex	Mini	10.5	1.59	2.25	0.22
GSTA4641N	4.6	4	5.5	Non-Hex	Mini	11.5	1.67	2.3	0.29
GSTA4642N	4	4	5.5	Non-Hex	Mini	11.5	1.59	2.25	0.24
GSTA4651N	4.6	5	5.5	Non-Hex	Mini	12.5	1.67	2.3	0.33
GSTA4652N	4	5	5.5	Non-Hex	Mini	12.5	1.59	2.25	0.27
GSTA4661N	4.6	6	5.5	Non-Hex	Mini	13.5	1.67	2.3	0.36
GSTA4662N	4	6	5.5	Non-Hex	Mini	13.5	1.59	2.25	0.29
GSTA4671N	4.6	7	5.5	Non-Hex	Mini	14.5	1.67	2.3	0.39
GSTA4672N	4	7	5.5	Non-Hex	Mini	14.5	1.59	2.25	0.31
GSTA4711N	4.6	1	7	Non-Hex	Mini	10.0	1.67	2.3	0.23
GSTA4712N	4	1	7	Non-Hex	Mini	10.0	1.59	2.25	0.19
GSTA4721N	4.6	2	7	Non-Hex	Mini	11.0	1.67	2.3	0.26
GSTA4722N	4	2	7	Non-Hex	Mini	11.0	1.59	2.25	0.22
GSTA4731N	4.6	3	7	Non-Hex	Mini	12.0	1.67	2.3	0.3
GSTA4732N	4	3	7	Non-Hex	Mini	12.0	1.59	2.25	0.24
GSTA4741N	4.6	4	7	Non-Hex	Mini	13.0	1.67	2.3	0.3
GSTA4742N	4	4	7	Non-Hex	Mini	13.0	1.59	2.25	0.26
GSTA4751N	4.6	5	7	Non-Hex	Mini	14.0	1.67	2.3	0.35
GSTA4752N	4	5	7	Non-Hex	Mini	14.0	1.59	2.25	0.29
GSTA4761N	4.6	6	7	Non-Hex	Mini	15.0	1.67	2.3	0.39
GSTA4762N	4	6	7	Non-Hex	Mini	15.0	1.59	2.25	0.31
GSTA4771N	4.6	7	7	Non-Hex	Mini	16.0	1.67	2.3	0.42
GSTA4772N	4	7	7	Non-Hex	Mini	16.0	1.59	2.25	0.33
GSTA5410N	5	1	4	Non-Hex	Reg	7.5	2.02	2.4	0.24
GSTA5420N	5	2	4	Non-Hex	Reg	8.5	2.02	2.4	0.28
GSTA5430N	5	3	4	Non-Hex	Reg	9.5	2.02	2.4	0.33
GSTA5440N	5	4	4	Non-Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.37
GSTA5450N	5	4	5	Non-Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.41
GSTA5460N	5	4	6	Non-Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.45
GSTA5470N	5	4	7	Non-Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.49
GSTA5610N	5	1	5.5	Non-Hex	Reg	9.0	2.02	2.4	0.27
GSTA5620N	5	2	5.5	Non-Hex	Reg	10.0	2.02	2.4	0.31
GSTA5630N	5	3	5.5	Non-Hex	Reg	11.0	2.02	2.4	0.35
GSTA5640N	5	4	5.5	Non-Hex	Reg	12.0	2.02	2.4	0.39
GSTA5650N	5	5	5.5	Non-Hex	Reg	13.0	2.02	2.4	0.44
GSTA5660N	5	6	5.5	Non-Hex	Reg	14.0	2.02	2.4	0.49
GSTA5670N	5	7	5.5	Non-Hex	Reg	15.0	2.02	2.4	0.53
GSTA5710N	5	1	7	Non-Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.3
GSTA5720N	5	2	7	Non-Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.34
GSTA5730N	5	3	7	Non-Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.39

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSTA5740N	5	4	7	Non-Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.42
GSTA5750N	5	5	7	Non-Hex	Reg	14.5	2.02	2.4	0.47
GSTA5760N	5	6	7	Non-Hex	Reg	15.5	2.02	2.4	0.51
GSTA5770N	5	7	7	Non-Hex	Reg	16.5	2.02	2.4	0.55
GSTA6410N	6	1	4	Non-Hex	Reg	7.5	2.02	2.4	0.36
GSTA6420N	6	2	4	Non-Hex	Reg	8.5	2.02	2.4	0.42
GSTA6430N	6	3	4	Non-Hex	Reg	9.5	2.02	2.4	0.48
GSTA6440N	6	4	4	Non-Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.53
GSTA6450N	6	5	4	Non-Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.59
GSTA6460N	6	6	4	Non-Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.67
GSTA6470N	6	7	4	Non-Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.71
GSTA6610N	6	1	5.5	Non-Hex	Reg	9.0	2.02	2.4	0.42
GSTA6620N	6	2	5.5	Non-Hex	Reg	10.0	2.02	2.4	0.47
GSTA6630N	6	3	5.5	Non-Hex	Reg	11.0	2.02	2.4	0.52
GSTA6640N	6	4	5.5	Non-Hex	Reg	12.0	2.02	2.4	0.58
GSTA6650N	6	5	5.5	Non-Hex	Reg	13.0	2.02	2.4	0.66
GSTA6660N	6	6	5.5	Non-Hex	Reg	14.0	2.02	2.4	0.72
GSTA6670N	6	7	5.5	Non-Hex	Reg	15.0	2.02	2.4	0.77
GSTA6710N	6	1	7	Non-Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.47
GSTA6720N	6	2	7	Non-Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.53
GSTA6730N	6	3	7	Non-Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.59
GSTA6740N	6	4	7	Non-Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.65
GSTA6750N	6	5	7	Non-Hex	Reg	14.5	2.02	2.4	0.71
GSTA6760N	6	6	7	Non-Hex	Reg	15.5	2.02	2.4	0.77
GSTA6770N	6	7	7	Non-Hex	Reg	16.5	2.02	2.4	0.82
GSTA7410N	7	1	4	Non-Hex	Reg	7.5	2.02	2.4	0.49
GSTA7420N	7	2	4	Non-Hex	Reg	8.5	2.02	2.4	0.56
GSTA7430N	7	3	4	Non-Hex	Reg	9.5	2.02	2.4	0.64
GSTA7440N	7	4	4	Non-Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.7
GSTA7450N	7	5	4	Non-Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.8
GSTA7460N	7	6	4	Non-Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.88
GSTA7470N	7	8	4	Non-Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.96
GSTA7610N	7	1	5.5	Non-Hex	Reg	9.0	2.02	2.4	0.59
GSTA7620N	7	2	5.5	Non-Hex	Reg	10.0	2.02	2.4	0.66
GSTA7630N	7	3	5.5	Non-Hex	Reg	11.0	2.02	2.4	0.74
GSTA7640N	7	4	5.5	Non-Hex	Reg	12.0	2.02	2.4	0.8
GSTA7650N	7	5	5.5	Non-Hex	Reg	13.0	2.02	2.4	0.9
GSTA7660N	7	6	5.5	Non-Hex	Reg	14.0	2.02	2.4	0.98
GSTA7670N	7	7	5.5	Non-Hex	Reg	15.0	2.02	2.4	1.06
GSTAS4611N	4.6	1	5.5	Non-Hex	Reg	9.0	2.02	2.4	0.21
GSTAS4621N	4.6	2	5.5	Non-Hex	Reg	10.0	2.02	2.4	0.25
GSTAS4631N	4.6	3	5.5	Non-Hex	Reg	11.0	2.02	2.4	0.28
GSTAS4641N	4.6	4	5.5	Non-Hex	Reg	12.0	2.02	2.4	0.31
GSTAS4651N	4.6	5	5.5	Non-Hex	Reg	13.0	2.02	2.4	0.36
GSTAS4661N	4.6	6	5.5	Non-Hex	Reg	14.0	2.02	2.4	0.4
GSTAS4671N	4.6	7	5.5	Non-Hex	Reg	15.0	2.02	2.4	0.43
GSTAS4711N	4.6	1	7	Non-Hex	Reg	10.5	2.02	2.4	0.24
GSTAS4721N	4.6	2	7	Non-Hex	Reg	11.5	2.02	2.4	0.27

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS


GSTAS4731N	4.6	3	7	Non-Hex	Reg	12.5	2.02	2.4	0.31
GSTAS4741N	4.6	4	7	Non-Hex	Reg	13.5	2.02	2.4	0.35
GSTAS4751N	4.6	5	7	Non-Hex	Reg	14.5	2.02	2.4	0.38
GSTAS4761N	4.6	6	7	Non-Hex	Reg	15.5	2.02	2.4	0.42
GSTAS4771N	4.6	7	7	Non-Hex	Reg	16.5	2.02	2.4	0.42

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм(Mini), 30 Нсм(Regular)

Наличие Шестигранного и размерного паза: 2,48 мм

• Винт-заглушка EbonyGold

Единица: мм

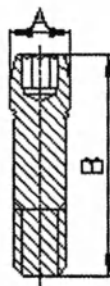

Винт-заглушка EbonyGold представлен в диапазоне размеров: 2,2;2,3 мм (А); 8,35;10,2 мм (В) и в двух вариантах: Mini и Regular.


Код	A(Ø) (+0.03,-0)	B (±0.05)	Масса (г)	Диаметр резьбы	Шаг резьбы	Высота головки Винт- заглушка	Диаметр паза	Глубина паза	Высота резьбы	Пометка
GSABSM	2.2	10.2	0.09	1.57	0.35	2.0	1.23	1.3	2.5	Mini
GSABSS	2.3	8.35	0.1	1.97	0.4	2.0	1.23	1.3	2.5	Reg

Число оборотов: 7 раз

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

3. Абатмент Angled

Единица: мм

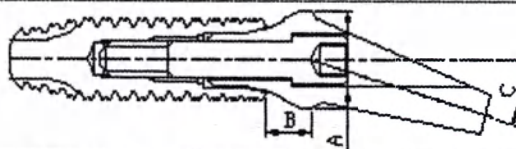

Hex (тип А)



Hex (тип В)



Non-Hex

Абатмент Angled представлен в диапазоне размеров: 4,0-6,0 мм (Ø); 2,0-4,0 мм (G/H) и в вариантах: Mini или Regular; Hex (тип А), Hex (тип В) или Non-Hex.

Код	A (Ø) (±0.05)	B (G/H) (±0.05)	C(°)	Пометка	Масса (г)	Внутренний диаметр абатмента	Внутренний диаметр абатмента, макс
-----	------------------	--------------------	------	---------	--------------	------------------------------------	--


Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSAA4520A	4.5	2.0	17	Hex (тип А)	Reg	0.27	2.02	4.5
GSAA4520B	4.5	2.0	17	Hex (тип В)	Reg	0.27	2.02	4.5
GSAA4520N	4.5	2.0	17	Non-Hex	Reg	0.27	2.02	4.5
GSAA4540A	4.5	4.0	17	Hex (тип А)	Reg	0.35	2.02	4.5
GSAA4540B	4.5	4.0	17	Hex (тип В)	Reg	0.35	2.02	4.5
GSAA4540N	4.5	4.0	17	Non-Hex	Reg	0.35	2.02	4.5
GSAA5020A	5.0	2.0	17	Hex (тип А)	Reg	0.38	2.02	5.0
GSAA5020B	5.0	2.0	17	Hex (тип В)	Reg	0.38	2.02	5.0
GSAA5020N	5.0	2.0	17	Non-Hex	Reg	0.38	2.02	5.0
GSAA5040A	5.0	4.0	17	Hex (тип А)	Reg	0.46	2.02	5.0
GSAA5040B	5.0	4.0	17	Hex (тип В)	Reg	0.46	2.02	5.0
GSAA5040N	5.0	2.0	17	Non-Hex	Reg	0.46	2.02	5.0
GSAA6020A	6.0	2.0	17	Hex (тип А)	Reg	0.55	2.02	6.0
GSAA6020B	6.0	2.0	17	Hex (тип В)	Reg	0.55	2.02	6.0
GSAA6020N	6.0	2.0	17	Non-Hex	Reg	0.55	2.02	6.0
GSAA6040A	6.0	4.0	17	Hex (тип А)	Reg	0.67	2.02	6.0
GSAA6040B	6.0	4.0	17	Hex (тип В)	Reg	0.67	2.02	6.0
GSAA6040N	6.0	4.0	17	Non-Hex	Reg	0.67	2.02	6.0
GSAA4020MA	4.0	2.0	17	Hex (тип А)	Mini	0.21	1.59	4.0
GSAA4020MB	4.0	2.0	17	Hex (тип В)	Mini	0.21	1.59	4.0
GSAA4020MN	4.0	2.0	17	Non-Hex	Mini	0.21	1.59	4.0
GSAA4040MA	4.0	4.0	17	Hex (тип А)	Mini	0.26	1.59	4.0
GSAA4040MB	4.0	4.0	17	Hex (тип В)	Mini	0.26	1.59	4.0
GSAA4040MN	4.0	4.0	17	Non-Hex	Mini	0.26	1.59	4.0
GSAA4520MA	4.5	2.0	17	Hex (тип А) для Mini	Mini	0.27	1.67	4.5
GSAA4520MB	4.5	2.0	17	Hex (тип В) для Mini	Mini	0.27	1.67	4.5
GSAA4520MN	4.5	2.0	17	Non-Hex для Mini	Mini	0.27	1.67	4.5
GSAA4540MA	4.5	4.0	17	Hex (тип А) для Mini	Mini	0.34	1.67	4.5
GSAA4540MB	4.5	4.0	17	Hex (тип В) для Mini	Mini	0.34	1.67	4.5
GSAA4540MN	4.5	4.0	17	Non-Hex для Mini	Mini	0.34	1.67	4.5

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)
Наличие Шестигранного и размерного паза Hex. (тип A) мм: 2.05 мм
Наличие Шестигранного и размерного паза Hex. (тип B) мм: 2.05 мм

4. Абатмент FreeForm ST

Единица: мм

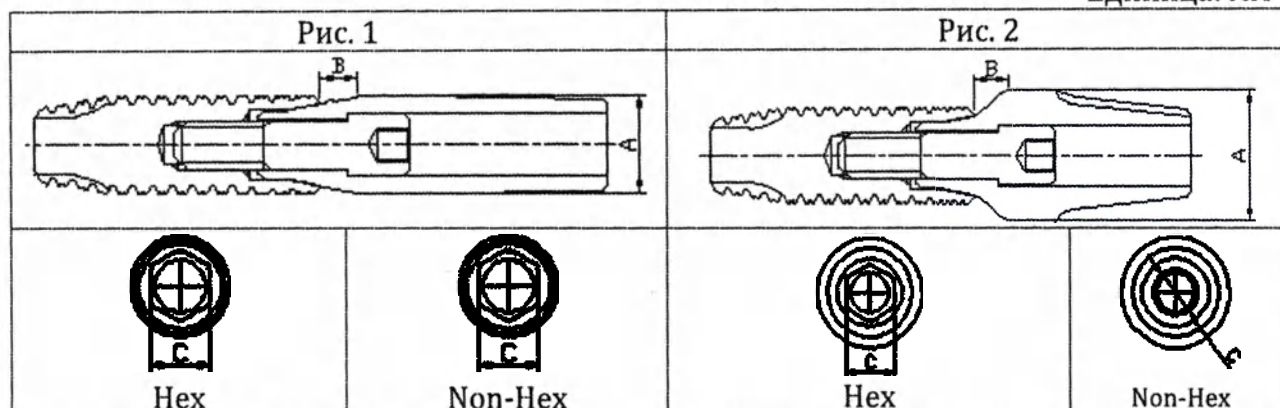

Абатмент FreeForm ST представлен в диапазоне размеров: 4,0-7,0 мм (Ø); 1,5;3,0 мм (G/H) и в вариантах: Mini или Regular, Hex или Non-Hex.


Код	A (Ø) (±0.05)	B (G/H) (±0.05)	C (±0.05)	Пом етк а		Мас са (г)	Внутре нный диаметр абатме нта, мин	Внутре нный диаметр абатме нта, макс	Дли на
GSFAM4015	4.0	1.5	2.08	Hex, Рис. 1	Mini	0.41	1.67	2.3	14.0
GSFAM4030	4.0	3.0	2.08		Mini	0.42	1.67	2.3	14.0
GSFA4015	4.0	1.5	2.48		Reg	0.42	2.02	2.4	14.5
GSFA4030	4.0	3.0	2.48		Reg	0.43	2.02	2.4	14.5
GSFA5015	5.0	1.5	2.48		Reg	0.48	2.02	2.4	14.5
GSFA5030	5.0	3.0	2.48		Reg	0.52	2.02	2.4	14.5
GSFA6015	6.0	1.5	2.48		Reg	0.81	2.02	2.4	14.5
GSFA6030	6.0	3.0	2.48		Reg	0.84	2.02	2.4	14.5
GSFAM4015N	4.0	1.5	-	Non - Hex, Рис. 1	Mini	0.41	1.67	2.3	14.0
GSFAM4030N	4.0	3.0	-		Mini	0.42	1.67	2.3	14.0
GSFA4015N	4.0	1.5	-		Reg	0.42	2.02	2.4	14.5
GSFA4030N	4.0	3.0	-		Reg	0.43	2.02	2.4	14.5
GSFA5015N	5.0	1.5	-		Reg	0.48	2.02	2.4	14.5
GSFA5030N	5.0	3.0	-		Reg	0.52	2.02	2.4	14.5
GSFA6015N	6.0	1.5	-		Reg	0.8	2.02	2.4	14.5
GSFA6030N	6.0	3.0	-		Reg	0.84	2.02	2.4	14.5
GSFA7015	7.0	1.5	2.48	Hex, Рис. 2	Reg	1.22	2.02	2.4	14.5
GSFA7030	7.0	3.0	2.48		Reg	1.24	2.02	2.4	14.5
GSFAS5015	5.0	1.5	2.48		Reg	0.76	2.02	2.4	14.5
GSFAS5030	5.0	3.0	2.48		Reg	0.73	2.02	2.4	14.5
GSFA7015N	7.0(±0.1)	1.5	-	Non -	Reg	1.22	2.02	2.4	14.5
GSFA7030N	7.0(±0.1)	3.0	-	Hex, Рис.	Reg	1.26	2.02	2.4	14.5

GSFAS5015N	5.0	1.5	-	2	Reg	0.76	2.02	2.4	14.5
GSFAS5030N	5.0	3.0	-		Reg	0.73	2.02	2.4	14.5

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

5. Абатмент GoldCast

Единица: мм

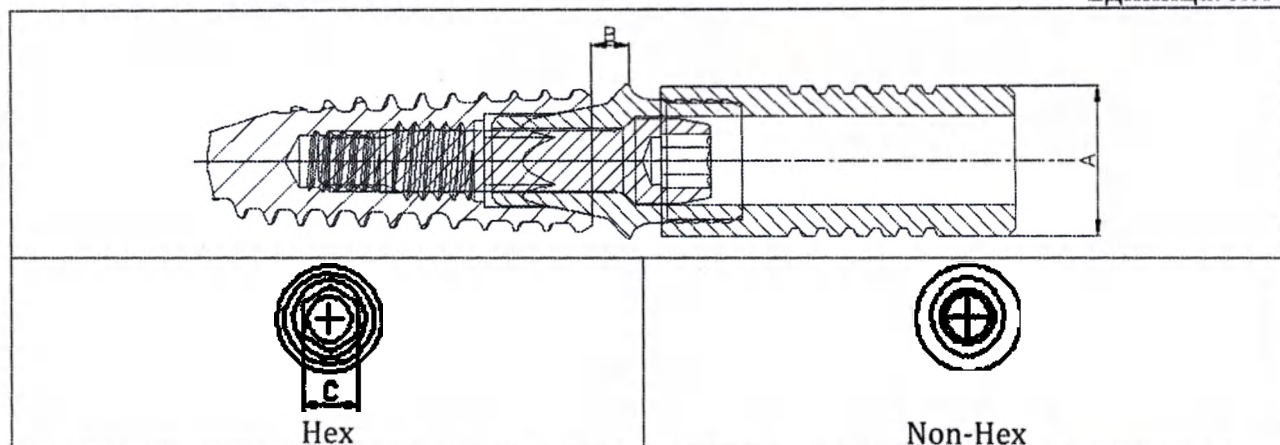

Абатмент GoldCast представлен в диапазоне размеров: 4,0;4,5 мм (Ø); 1,0;3,0 мм (G/H) и в вариантах: Mini или Regular, Hex или Non-Hex.

Код	A(Ø) (+0,- 0.05)	B (G/H) (±0.05)	C (±0. 005)	Пометка	Дл ин а	Мас са (г)	Внутре ний диамет р абатме нта, мин	Внутрен ний диаметр абатмен та, макс
GSGA4010S	4.0	1.0	2.08	Hex	Mini	6.5	0.46	1.67
GSGA4030S	4.0	3.0	2.08		Mini	8.5	0.65	1.67
GSGA4510S	4.5	1.0	2.48		Reg	6.4	0.56	2.02
GSGA4530S	4.5	3.0	2.48		Reg	8.4	0.82	2.02
GSGA4010B	4.0	1.0	-	Non - Hex	Mini	5.9	0.44	1.67
GSGA4030B	4.0	3.0	-		Mini	7.9	0.64	1.67
GSGA4510B	4.5	1.0	-		Reg	6.4	0.56	2.02
GSGA4530B	4.5	3.0	-		Reg	8.4	0.82	2.02

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

6. Абатмент NP-CAST

Единица: мм



Абатмент NP-CAST представлен в диапазоне размеров: 4,0-4,5 мм (Ø); 1,0-3,0 мм (G/H) и в вариантах: Mini или Regular, Hex или Non-Hex.

Код	A (G/H) (±0.05)	B(Ø) (+0.05,- 0)	C (±0.05)	D (±0.1)	Пометка	Масс а (г)	Внутренн ий диаметр абатмента, а, мин	Внутренн ий диаметр абатмента, макс
-----	---------------------------	------------------------	------------------	-------------	---------	---------------	---	---

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS


GSNA4010B	1.0	4.0	3.0	10.0	Non-Hex	Mini	0.26	1.69	2.3
GSNA4030B	3.0	4.0	5.0	10.0	Non-Hex	Mini	0.34	1.69	2.3
GSNA4510B	1.0	4.5	3.71	10.0	Non-Hex	Reg	0.35	2.04	2.4
GSNA4530B	3.0	4.5	5.71	10.0	Non-Hex	Reg	0.48	2.04	2.4
GSNA4010S	1.0	4.0	3.5	10.0	Hex	Mini	0.26	1.69	2.3
GSNA4030S	3.0	4.0	5.5	10.0	Hex	Mini	0.34	1.69	2.3
GSNA4510S	1.0	4.5	3.71	10.0	Hex	Reg	0.35	2.04	2.4
GSNA4530S	3.0	4.5	5.71	10.0	Hex	Reg	0.47	2.04	2.4

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

Наличие Шестигранного и размерного паза, мм: 1.5(только Hex)

7. Абатмент ZioCera

Единица: мм

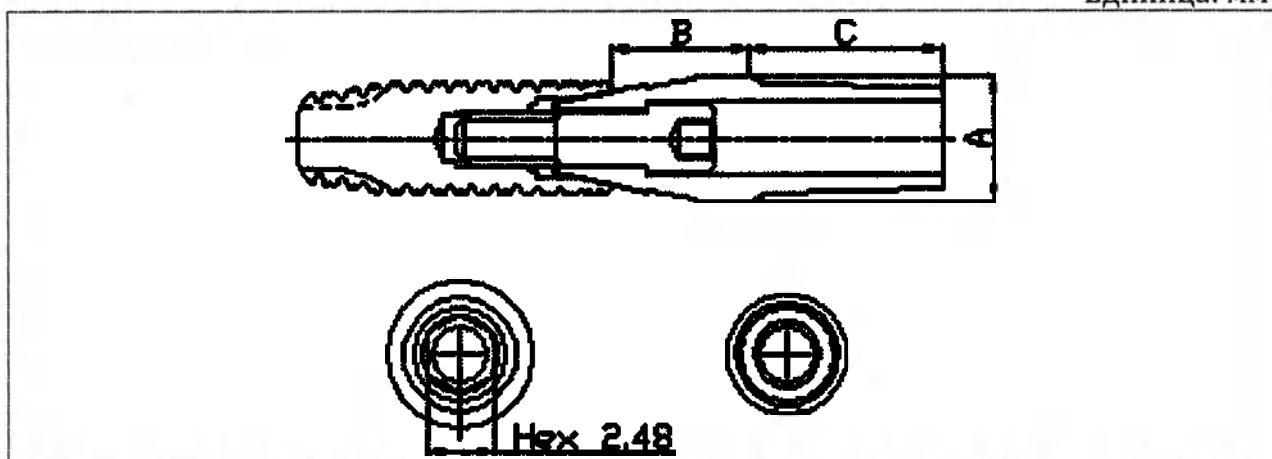

Hex

Non-Hex

Абатмент ZioCera представлен в диапазоне размеров: 4,5-6,5 мм (Ø); 3,5;5,0 мм (G/H); 7,0 мм (H) и в вариантах: Mini или Regular, Hex или Non-Hex.


Код	A(Ø) (±0.1)	B (±0.05)	C (±0.1)	Длина	Пометка	Масса (г)	Внутренний диаметр абатмента, мин	Внутренний диаметр абатмента, макс
GSZAM4535	4.5	3.5	7.0	12.75	Mini, Hex тип	0.6	1.68	2.35
GSZAM4550	4.5	5.0	7.0	14.25		0.66	1.68	2.35
GSZAM4535N	4.5	3.5	7.0	12.75	Mini, Non-Hex. тип	0.6	1.68	2.35
GSZAM4550N	4.5	5.0	7.0	14.25		0.66	1.68	2.35
GSZAS4535	4.5	3.5	7.0	13.0	Regular, Hex тип	0.55	2.08	2.65
GSZAS4550	4.5	5.0	7.0	14.50		0.63	2.08	2.65
GSZAS5535	5.5	3.5	7.0	13.0		0.86	2.08	2.65
GSZAS5550	5.5	5.0	7.0	14.50		1.02	2.08	2.65
GSZAS6535	6.5	3.5	7.0	13.0		1.34	2.08	2.65
GSZAS6550	6.5	5.0	7.0	14.50		1.51	2.08	2.65
GSZAS4535N	4.5	3.5	7.0	13.0	Regular, Non- Hex тип	0.54	2.08	2.65
GSZAS4550N	4.5	5.0	7.0	14.50		0.63	2.08	2.65
GSZAS5535N	5.5	3.5	7.0	13.0		0.86	2.08	2.65
GSZAS5550N	5.5	5.0	7.0	14.50		1.02	2.08	2.65
GSZAS6535N	6.5	3.5	7.0	13.0		1.34	2.08	2.65
GSZAS6550N	6.5	5.0	7.0	14.50		1.51	2.08	2.65

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

Наличие Шестигранного и размерного паза: 2.08 мм (Mini)/2.48 мм (Regular)

• Винт-заглушка EbonyGold

Единица: мм

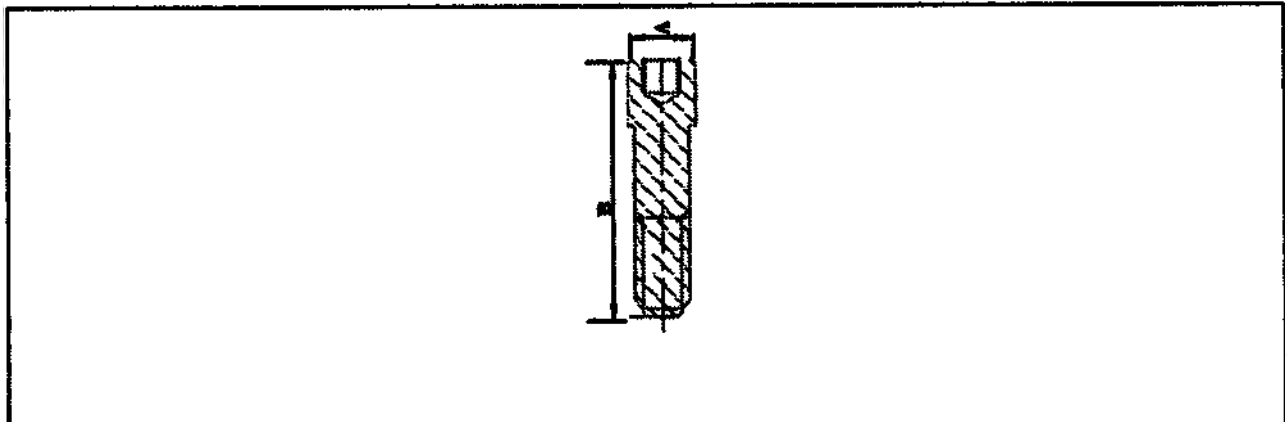

Винт-заглушка EbonyGold представлен в диапазоне размеров: 2,2;2,5 мм (A); 8,85;10,7 мм (B) и в двух вариантах: Mini или Regular.

Код	A(Ø) (+0.0 3,-0)	B (±0. 05)	Мас са (г)	Диаме тр резьб ы	Шаг резь бы	Высота головки Винт- заглушка а	Диаме тр паза	Глуб ина паза	Пометка
GSASM	2.2	10.7	0.1	1.57	0.35	2.5	1.23	1.3	Mini
GSASR	2.5	8.85	0.12	1.97	0.4	2.5	1.23	1.3	Regular


Высота резьбы: Mini_ 1.75 мм, Regular_ 2.5 мм

Число оборотов: Mini_ 5 раз, Regular_ 6 раз

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

8. Абатмент ZioCera Angled

Единица: мм

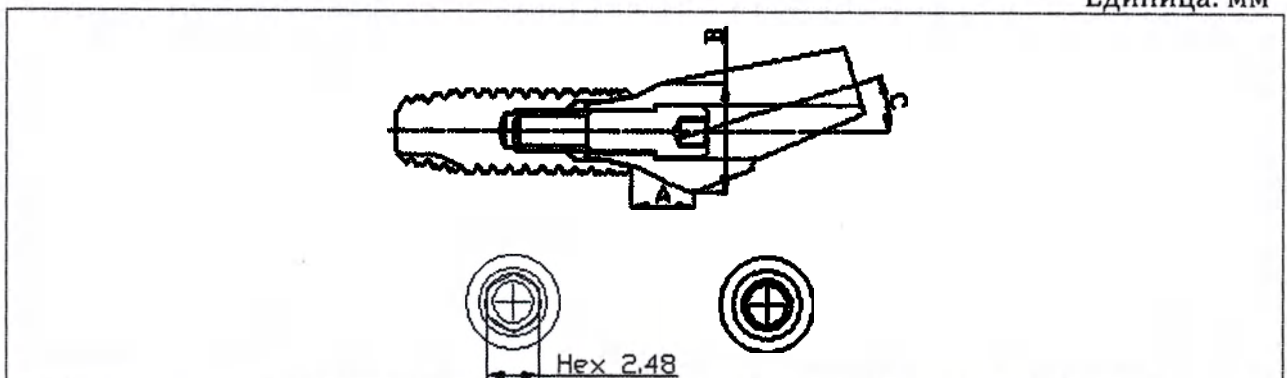

Hex

Non-Hex



Абатмент ZioCera Angled представлен в диапазоне размеров: 5,5;6,5 мм (Ø); 3,0;4,0 мм (G/H); 17° (C) и в вариантах: Regular, Hex или Non-Hex.

Код	A (G/H) (±0.05)	B(Ø) (±0.05)	C(°)	Пометка		Масса (г)	Внутренни й диаметр абатмента, мин	Внутренни й диаметр абатмента, макс
GS17ZAS5530	3.0	5.5	17	Hex тип	Reg	0.88	2.08	2.65
GS17ZAS6540	4.0	6.5	17		Reg	1.36	2.08	2.65
GS17ZAS5530N	3.0	5.5	17	Non-Hex тип	Reg	0.88	2.08	2.65
GS17ZAS6540N	4.0	6.5	17		Reg	1.36	2.08	2.65

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 30 Нсм (Regular)
Наличие Шестигранного и размерного паза 2,48 мм

9. Абатмент Темпрогагу

Единица: мм

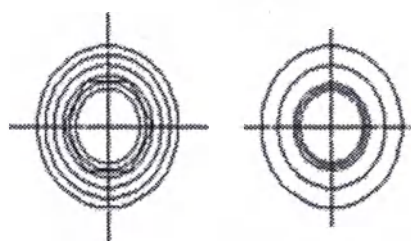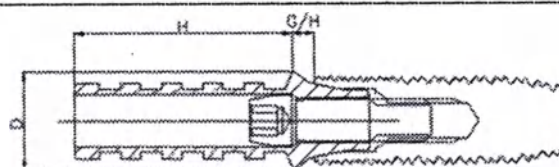

Hex

Non-Hex

Абатмент Темпрогагу представлен в диапазоне размеров: 4,0;4,5 мм (Ø); 1,0;3,0 мм (G/H) и в вариантах: Mini или Regular, Hex или Non-Hex.

Код	D(Ø) (+0,-0.02)	H (±0.1)	G/H (±0.05)	Длин а	Пометка		Мас са (г)	Внутр. диамет р абатмен та, мин	Внутр. диамет р абатмен та, макс
GSTTA4010	4.0	10	1.0	13.6	Hex.	Mini	0.22	1.67	2.3
GSTTA4030	4.0	10	3.0	15.6			0.27	1.67	2.3
GSTTA4510	4.5	10	1.0	13.5		Reg	0.3	2.02	2.4
GSTTA4530	4.5	10	3.0	15.5			0.38	2.02	2.4
GSTTA4010N	4.0	10	1.0	13.6	Non - Hex.	Mini	0.22	1.67	2.3
GSTTA4030N	4.0	10	3.0	15.6			0.27	1.67	2.3
GSTTA4510N	4.5	10	1.0	13.5		Reg	0.3	2.02	2.4
GSTTA4530N	4.5	10	3.0	15.5			0.38	2.02	2.4

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

Наличие шестигранного и размерного паза, мм: 2.08 мм Hex

• Титановый Винт-заглушка

Единица: мм




Титановый Винт-заглушка представлен в диапазоне размеров: 2,2;2,3 мм (A); 8,35;10,2 мм (B) и в двух вариантах: Mini и Regular.

Код	A(Ø) (+0.03,-0)	B (±0.05)	Масса (г)	Высота резьбы	Шаг резьбы	Число оборотов	Диаметр резьбы	Диаметр головки Винт-	Диаметр паза	Глубина паза	Пометка
GSABSMT	2.2	10.2	0.09	1.75	0.35	5 раз	1.57	2.0	1.23	1.3	Mini
GSABSST	2.3	8.35	0.1	2.50	0.4	6 раз	1.97	2.0	1.23	1.3	Reg

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

10. Абатмент Quick Temporaгу

Рисунок 1, Единица: мм

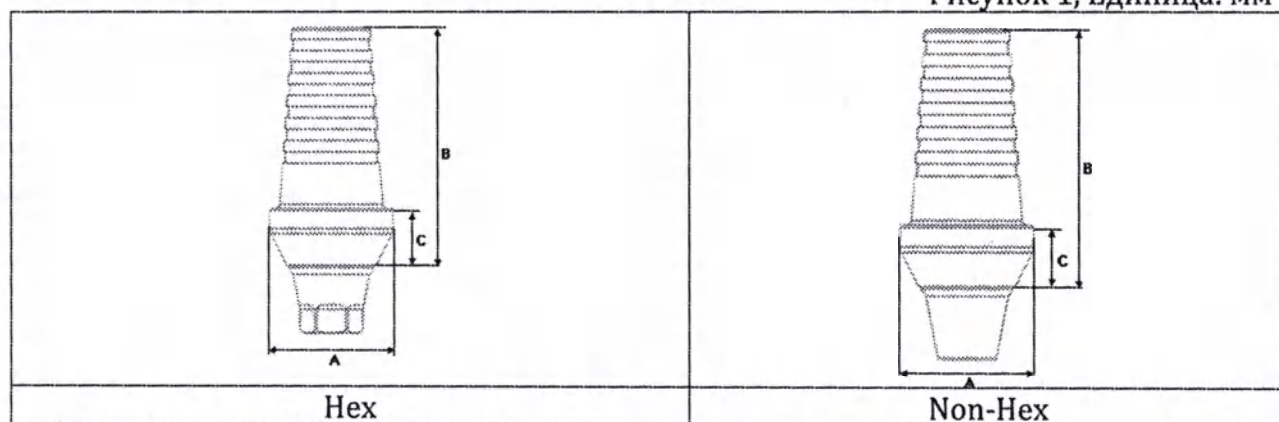


Абатмент Quick Temporaгу представлен в диапазоне размеров: 4,5;5,5 мм (Ø); 11,5 мм (B); 4,38 мм (C) и в вариантах: Mini или Regular, Hex или Non-Hex.

Код	A(Ø) (±0.05)	B (±0.05)	C (±0.05)	Пометка		Длина	Наличие Hex и размерного паза
TSQTA4550	4.5	11.5	4.38	Hex.	Mini	14.5	2.08
TSQTA5550	5.5	11.5	4.35		Reg	14.4	2.48
TSQTA4550N	4.5	11.5	4.38	Non-Hex.	Mini	13.8	-
TSQTA5550N	5.5	11.5	4.35		Reg	14.2	-

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

Рисунок 2, Единица: мм

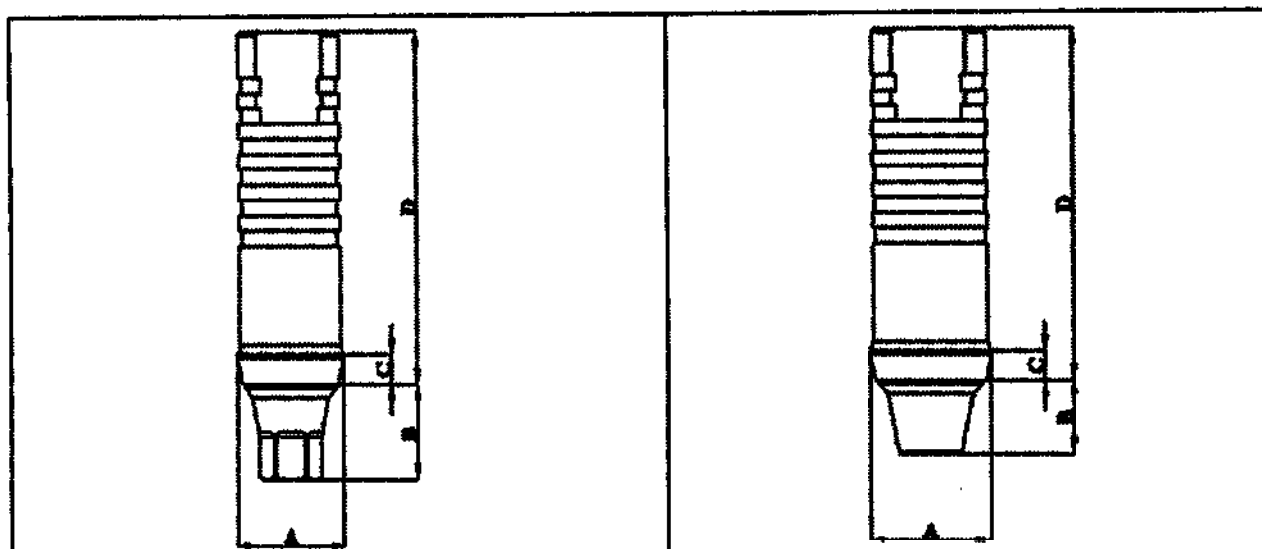

Hex

Non-Hex

Абатмент Quick Tempogary представлен в диапазоне размеров: 4,0;4,5 мм (Ø); 2,4-6,6 мм (B); 1 мм (C); 11,5 мм (D) и в вариантах: Mini или Regular, Hex или Non-Hex.


TSQTA4015M	4.0	3.1	1.0	11.5	Hex.	Mini	0.18
TSQTA4050M	4.0	6.6	1.0	11.5		Mini	0.23
TSQTA4515R	4.5	3.0	1.0	11.5		Reg	0.21
TSQTA4550R	4.5	6.5	1.0	11.5		Reg	0.29
TSQTA4015MN	4.0	2.4	1.0	11.5	Non-Hex.	Mini	0.18
TSQTA4050MN	4.0	5.9	1.0	11.5		Mini	0.23
TSQTA4515RN	4.5	2.8	1.0	11.5		Reg	0.21
TSQTA4550RN	4.5	6.3	1.0	11.5		Reg	0.29

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

Наличие Шестигранного и размерного паза, мм: 2.08(только Hex)

11. Абатмент Multi

Единица: мм

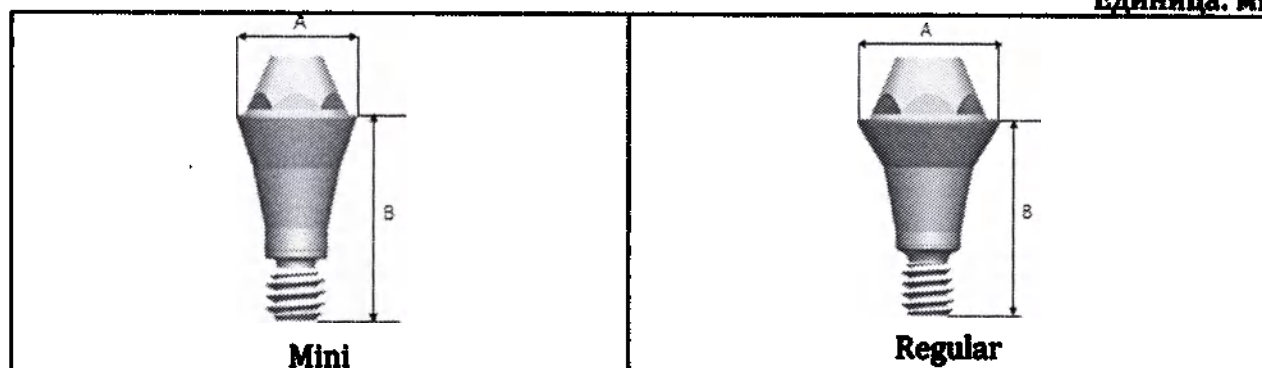

Mini

Regular

Абатмент Multi представлен в диапазоне размеров: 4,8 мм (Ø); 6,0-10,4 мм (B) и в двух вариантах: Mini или Regular.

Пометка


Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

TSMA5010M	4.8	6.0	8.3	0.18	1.97	0.4	1.8	3 раза	Mini
TSMA5020M	4.8	7.0	9.3	0.23	1.97	0.4	1.8	3 раза	Mini
TSMA5030M	4.8	8.0	10.3	0.28	1.97	0.4	1.8	3 раза	Mini
TSMA5040M	4.8	9.0	11.3	0.34	1.97	0.4	1.8	3 раза	Mini
TSMA5050M	4.8	10.0	12.3	0.4	1.97	0.4	1.8	3 раза	Mini
TSMA5010	4.8	6.4	8.7	0.22	1.97	0.4	2	4 раза	Regular
TSMA5020	4.8	7.4	9.7	0.28	1.97	0.4	2	4 раза	Regular
TSMA5030	4.8	8.4	10.7	0.34	1.97	0.4	2	4 раза	Regular
TSMA5040	4.8	9.4	11.7	0.4	1.97	0.4	2	4 раза	Regular
TSMA5050	4.8	10.4	12.7	0.46	1.97	0.4	2	4 раза	Regular

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

• Носитель Абатментов Multi

Единица: мм

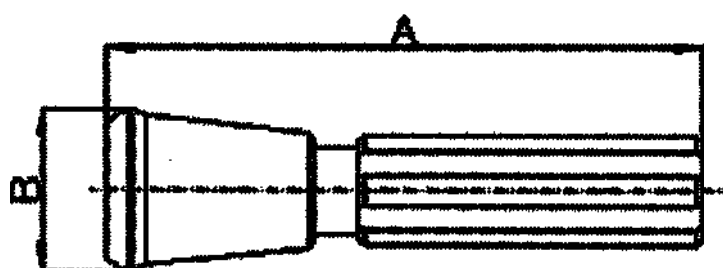


Носитель Абатментов Multi представлен в диапазоне размеров: 20,8 мм (A); 5,8 мм (B) и в разных цветах: слоновая кость или белый.

TSMACK500M	20.8	5.8	Слоновая кость	0.31
TSMACK500R	20.8	5.8	Белый	0.31

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

12. Абатмент Multi Angled

Единица: мм

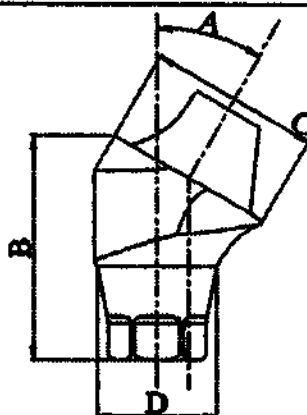

Абатмент Multi Angled представлен в диапазоне размеров: 17° (A); 5-7,6 мм (B); 4,8 мм (C), 2,84-3,43 мм (D) и в вариантах: Mini или Regular, Hex.


GS17MAM4820	17	5.1	4.8	2.84	0.18	Hex	Mini
GS17MAM4830	17	5.6	4.8	2.88	0.2	Hex	Mini

Инструкция по применению
компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GS17MAM4840	17	6.6	4.8	2.88	0.24	Hex	Mini
GS30MAM4830	30	6.1	4.8	2.84	0.19	Hex	Mini
GS30MAM4840	30	6.6	4.8	2.88	0.21	Hex	Mini
GS30MAM4850	30	7.6	4.8	2.88	0.24	Hex	Mini
GS17MAS4820	17	5	4.8	3.39	0.2	Hex	Reg
GS17MAS4830	17	5.5	4.8	3.43	0.22	Hex	Reg
GS17MAS4840	17	6.5	4.8	3.43	0.27	Hex	Reg
GS30MAS4830	30	6	4.8	3.39	0.21	Hex	Reg
GS30MAS4840	30	6.5	4.8	3.43	0.23	Hex	Reg
GS30MAS4850	30	7.5	4.8	3.43	0.27	Hex	Reg
Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)							

• **Винт-заглушка EbonyGold**

Единица: мм

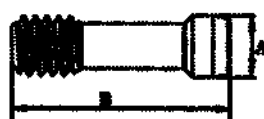

Винт-заглушка EbonyGold представлен в диапазоне размеров: 2,0;2,05 мм (A); 7,5;9,6 мм (B) и в двух вариантах: Mini или Regular.

Код	A(Ø) (+0.03,-0)	B (±0.05)	Масса (г)	Высота резьбы	Диаметр резьбы	Высог головки Винт- заглушкаа	Диаметр паза	Глубина паза	Шаг резьбы	Число оборотов	Пометка
GSMABSM	2.0	9,6	0.06	2.5	1.57	1.4	1.2	1.2	0.4	7 раз	Mini
GSMABSS	2.05	7,5	0.06	2.5	1.97	1.3	1.2	1.2	0.4	7 раз	Regular
Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)											

• **Носитель Абатментов Multi Angled**

Единица: мм



Носитель Абатментов Multi Angled представлен в диапазоне размеров: 1,7;3,95 мм (A); 19,7 мм (B).


Код	A (±0.05)	B (±0.1)	Пометка	Масса (г)	Высота резьбы	Шаг резьбы	Число оборотов
-----	--------------	-------------	---------	-----------	------------------	---------------	-------------------

Инструкция по применению
компоненты для установки стоматологических имплантов TS

GSMAC	3.95	19.7	-	Reg	0.53	1.5	0.3	3 раза
GSMACM	1.7	19.7	желтый	Mini	0.53	1.5	0.3	3 раза
Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)								

13. Абатмент Convertible

Единица: мм

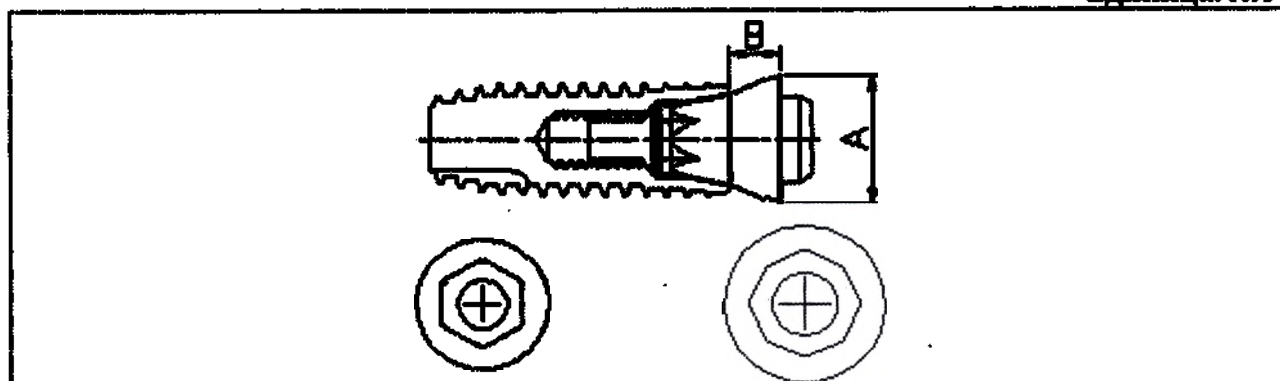

Hex

восьмигранный

Абатмент Convertible представлен в диапазоне размеров: 4,0-6,0 мм (Ø); 1,0-5,0 мм (B) и в двух вариантах: Mini или Regular.

GSCA4010	4.0	1.0	7	0.12	Hex.	Mini	1.97	0.4	1.8
GSCA4020	4.0	2.0	8	0.16			1.97	0.4	1.8
GSCA4030	4.0	3.0	9	0.2			1.97	0.4	1.8
GSCA4040	4.0	4.0	10	0.24			1.97	0.4	1.8
GSCAS4010	4.0	1.0	8.4	0.15	Вос ьми гр.	Reg	1.97	0.4	2.0
GSCAS4020	4.0	2.0	9.4	0.2			1.97	0.4	2.0
GSCAS4030	4.0	3.0	10.4	0.24			1.97	0.4	2.0
GSCAS4040	4.0	4.0	11.4	0.28			1.97	0.4	2.0
GSCA5010	4.8	1.0	7.6	0.16			1.97	0.4	2.0
GSCA5020	4.8	2.0	8.6	0.21			1.97	0.4	2.0
GSCA5030	4.8	3.0	9.6	0.27			1.97	0.4	2.0
GSCA5040	4.8	4.0	10.6	0.33			1.97	0.4	2.0
GSCA5050	4.8	5.0	11.6	0.4			1.97	0.4	2.0
GSCA6010	6.0	1.0	7.6	0.18			1.97	0.4	2.0
GSCA6020	6.0	2.0	8.6	0.25			1.97	0.4	2.0
GSCA6030	6.0	3.0	9.6	0.32			1.97	0.4	2.0
GSCA6040	6.0	4.0	10.6	0.41			1.97	0.4	2.0
GSCA6050	6.0	5.0	11.6	0.49			1.97	0.4	2.0


Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

Наличие Шестигранного и размерного паза, мм: 2.4 мм

Наличие восьмигранного и размерного паза, мм: 3.0 мм

• Носитель Абатментов Convertible

Единица: мм

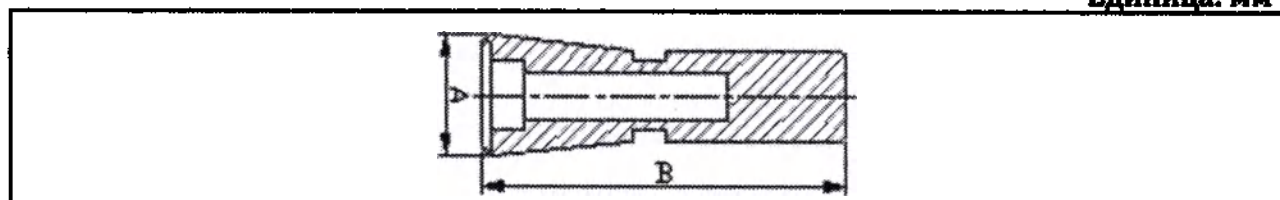


Носитель Абатментов Convertible представлен в диапазоне размеров: 4,6-6,6 мм (A); 16,4;16,5 мм (B).

Код	A(Ø)	B (±0.2)	Масса (г)	Внутренний диаметр	Глубина паза
GSCK400	4.6(±0.05)	16.5	0.23	2.0	10.9
GSCK500	5.4(±0.05)	16.5	0.25	2.1	10.9
GSCK600	6.6(±0.1)	16.4	0.31	2.2	10.9

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

14. Абатмент Stud

Единица: мм

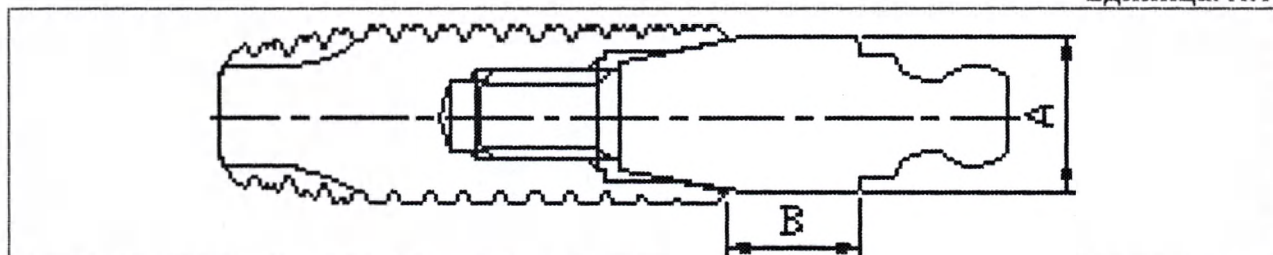


Абатмент Stud представлен в диапазоне размеров: 3,5 мм (Ø); 1,0-6,0 мм (B) и в двух размерах: Mini или Regular.

Код	A(Ø) (+0.05, -0)	B (±0.0 5)	Длин а	Мас са (г)	Пометка	Диаметр резьбы	Шаг резьбы	Высота резьбы
GSSAM3510	3.5	1.0	9.35	0.16	Mini	1.97	0.4	1.8
GSSAM3520	3.5	2.0	10.35	0.2		1.97	0.4	1.8
GSSAM3530	3.5	3.0	11.35	0.24		1.97	0.4	1.8
GSSAM3540	3.5	4.0	12.35	0.28		1.97	0.4	1.8
GSSAM3550	3.5	5.0	13.35	0.33		1.97	0.4	1.8
GSSAM3560	3.5	6.0	14.35	0.37		1.97	0.4	1.8
GSSA3510	3.5	1.0	9.75	0.2	Reg	1.97	0.4	2.0
GSSA3520	3.5	2.0	10.75	0.24		1.97	0.4	2.0
GSSA3530	3.5	3.0	11.75	0.28		1.97	0.4	2.0
GSSA3540	3.5	4.0	12.75	0.32		1.97	0.4	2.0
GSSA3550	3.5	5.0	13.75	0.37		1.97	0.4	2.0
GSSA3560	3.5	6.0	14.75	0.41		1.97	0.4	2.0

Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)

15. Абатмент Port Angled

Единица: мм

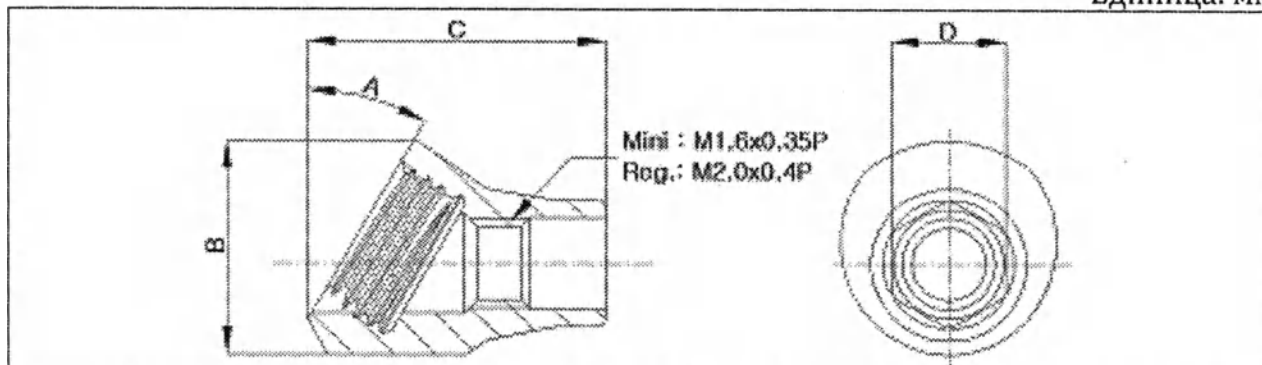

Абатмент Port Angled представлен в диапазоне размеров: 10° (A); 4,63-4,82 мм (B); 6,5-7,6 мм (C) и в двух вариантах.

Инструкция по применению
Компоненты для установки стоматологических имплантов TS

TS10PA454M	10°	4.63	6.8	2.08	0.15	Mini/M1.6x0.35P
TS10PA455M	10°	4.63	7.6	2.08	0.18	Mini/M1.6x0.35P
TS17PA454M	17°	4.73	6.8	2.08	0.15	Mini/M1.6x0.35P
TS17PA455M	17°	4.73	7.6	2.08	0.18	Mini/M1.6x0.35P
TS30PA454M	30°	4.68	6.8	2.08	0.15	Mini/M1.6x0.35P
TS30PA455M	30°	4.68	7.6	2.08	0.18	Mini/M1.6x0.35P
TS10PA454R	10°	4.67	6.5	2.48	0.17	Reg/M2.0x0.4P
TS10PA455R	10°	4.67	7.5	2.48	0.22	Reg/M2.0x0.4P
TS17PA454R	17°	4.82	6.5	2.48	0.17	Reg/M2.0x0.4P
TS17PA455R	17°	4.82	7.5	2.48	0.22	Reg/M2.0x0.4P
TS30PA454R	30°	4.74	6.5	2.48	0.16	Reg/M2.0x0.4P
TS30PA455R	30°	4.74	7.5	2.48	0.21	Reg/M2.0x0.4P
Рекомендуемое усилие при ввинчивании: 20 Нсм (Mini), 30 Нсм (Regular)						
Номинальный размер резьбы: 2.5 мм						

서울 서초구 서초대로49길 5, 501호
(서초동 1716-7, 송보빌딩)
[별지 제43호서식]

공증인가
법무법인

도시 

(전화) 02-2183-0686
(팩스) 02-2183-0690

등부 2024년 제 2131호

Registered No. 2024-2131

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 사용자설명서-----에
기재된 오스템임플란트 주식회사
대표이사 김 해 성-----

Oh Eun Kyung-----

attorney-in-fact of
Kim Hae Sung/President of OSSTEM
IMPLANT Co., Ltd.-----


외 대리인 오 온정-----온
본 공증인의 앞에서 위 본인이-----
서명날인한 사실을 인정했다.

appeared before me and admitted
said principal's subscription to
the attached Instruction for Use.---

2024년 09월 03일
이 사무소에서 위 인증한다.

This is hereby attested on this
3rd day of Sep. 2024 at this office.

공증인가 도시
법무법인

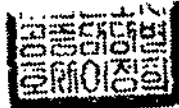

DOSI LAW FIRM

소 속 서울중앙지방검찰청

Belong to Seoul Central
District Prosecutor's Office

서울 서초구 서초대로49길 5, 501호
(서초동 1716-7, 송보빌딩)

Address of the office
#501, 5, Seocho-daero 49-gil,
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

이정희



Lee Jung Hee

공증담당변호사

이 정 희

Signature of the Notary Public

Lee Jung Hee

본 사무소는 인가번호 제2022-250호에 의거하여 2022년 04월 20일 법무부 장관으로부터 공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
20, Apr. 2022 Under Law No.2022-250.

210mm X 297mm
보론용지(1종) 70g/㎡

Перевод с английского и корейского языков на русский язык

*/Фрагмент печати: ЛН ЧКУН ХИ * Государственный нотариус/*

501, 5, Сочо-дэро 49-
гиль, Сочо-гу, Сеул,
Корея (1716-7 Сочо-дон,
здание Сынбо)
[Форма документа № 41]

Нотариальное
заверение

Юридическая фирма «Доси»

(Тел.): 02-2183-0686
(Факс): 02-2183-0690

Регистрационный номер 2024 – 2131

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДОСИ»
(DOSI LAW FIRM)**

№ 501, 5, Сочо-дэро 49-гиль,
Сочо-гу, Сеул, Республика Корея
(#501, 5, Seocho-daero 49-gil,
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea)

/Рельефный оттиск на самоклеящемся лейбле: Юридическая фирма «Доси»/

210 мм x 297 мм
Офисная бумага (1-й сорт) 70 г/м²

Инструкция по применению

Кому: Росздравнадзор

Мы, компания «Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.), настоящим заявляем, что данная Инструкция по применению, предоставленная в Росздравнадзор, является полной, достоверной и подлинной.

**«Осстем Имплант Ко., Лтд.»
Должность: Президент
Имя: Ким Хэ Сун (Kim Hae Sung)**

/Подпись/

/Печать: «ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд.»/

***/Фрагмент печати: ЛИ ЧЖУН ХИ *
Государственный нотариус/
/Штамп: 66, 16, Бансон-ро 513 бон-гиль,
Хэюндэ-гу, Пусан (66, 16, Bansong-ro 513beon-
gil, Haeundae-gu, Busan)
«ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд.»/***

501, 5, Сочо-дэро 49-
гиль, Сочо-гу, Сеул,
Корея (1716-7 Сочо-дон,
здание Сымбо)
[Формы документа № 43]

Нотариальное
закрепление

Юридическая фирма «Доси»

(Тел.): 02-2183-0686
(Факс): 02-2183-0690

Регистрационный № 2024 – 2131

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О Ын Кён (Oh Eun Kyung),

доверенное лицо
Кима Хэ Суна, Президента
Компании «Осстем Имплант Ко., Лтд.»,

явился ко мне и признал указанную
подпись доверителя на прилагаемой
Инструкции по применению

Удостоверено сегодня, 3 сентября 2024 года, в данном учреждении.

/Фрагмент печати: ЛИ ЧЖУН ХИ * Государственный нотариус/
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДОСИ»

При Центральной районной
прокуратуре города Сеула
Адрес конторы
№ 501, 5, Сочо-дэро 49-гиль,
Сочо-гу, Сеул, Республика Корея


/Печать: ЛИ ЧЖУН ХИ * Государственный нотариус/

/Подпись/
Подпись государственного нотариуса
Ли Чжун Хи (Lee Jung Hee)

Данное учреждение уполномочено Министром юстиции Республики Корея действовать в качестве
государственного нотариуса с 20 апреля 2022 года в соответствии с законом № 2022-250.

210 мм x 297 мм
Офисная бумага (1-й сорт) 70 г/м²

Перевод данного текста выполнен переводчиком Пахтуновым Алексеем Владимировичем.

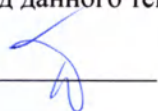

Российская Федерация
Город Москва

Шестнадцатого сентября две тысячи двадцать четвертого года

Я, Юракова Диана Шевкетовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Пахтунова Алексея Владимировича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024-

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

44-207



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 51 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса