


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Аппараты CEREC MC, CEREC MC X, CEREC MC XL Premium Package для изготовления стоматологических безметалловых ортопедических конструкций с принадлежностями», производства SIRONA Dental Systems GmbH, Германия



CEREC MC

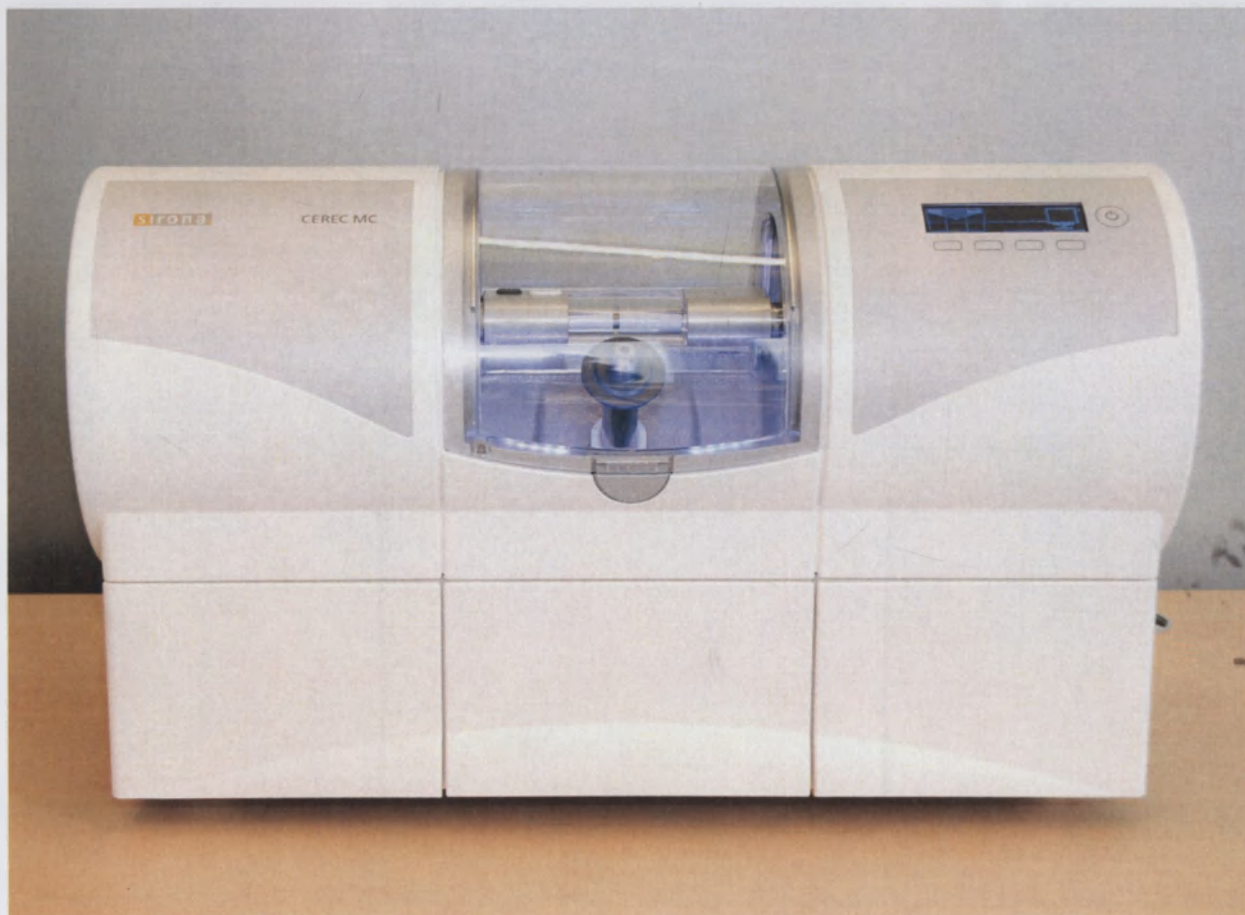

CEREC MC X



CEREC MC XL Premium Package

ОСНОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Монитор специальный.	
2. Панель управления сенсорная.	
3. Модуль для связи (радиомодуль) представляет собой WiFi роутер, необходимый для связи между врачебным (мобильный) блоком для съемки и шлифовальным аппаратом (устанавливается стационарно).	


4. Блок питания модуля для связи





5. Блок обработки данных специальный, в составе: системный блок, клавиатура, мышь.



6. Фрезы конусовидной и цилиндрической формы в наборах и отдельных упаковках: Step Bur (10 – 60; 10S – 60S), Cylinder Pointed Bur (10 – 60; 10S – 60S), Cone Bur (10 – 60), Finisher (10 – 60), Shaper (10 – 60; 10RZ - 60RZ)

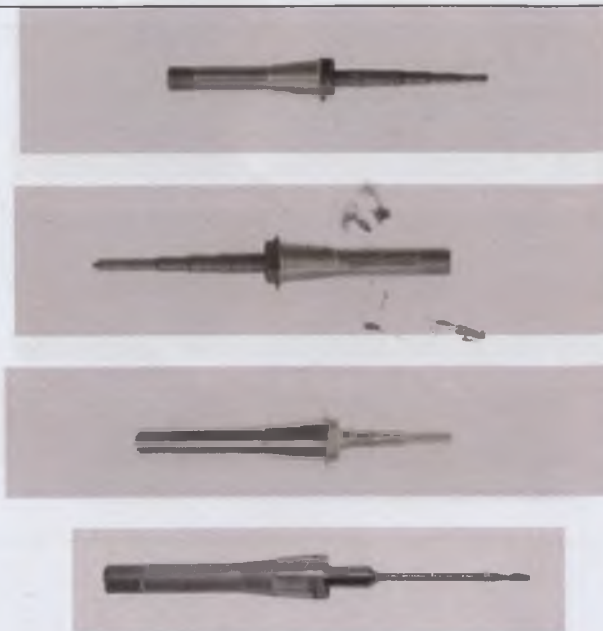

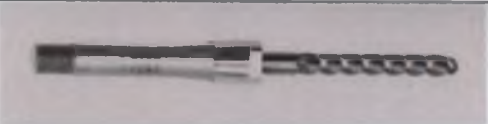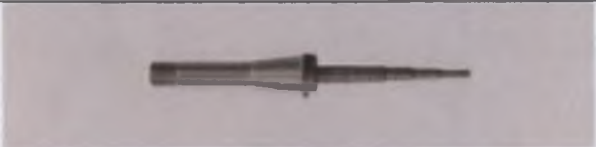	
7. Набор фрез Starter Set Burs 4: - Step Bur 12S – 2 шт; - Cylinder Pointed Bur 12S – 2 шт.	 
8. Набор фрез Starter Set Burs 6: - Step Bur 12S – 2 шт; - Cylinder Pointed Bur 12S – 2 шт; - Step Bur 20 – 1 шт; - Cylinder Pointed Bur 20 – 1 шт.	 
9. Набор инструментов для калибровки (фреза калибровочная – не более 4 шт; образец – не более 2 шт.)	



Калибровочный образец


10. Инструмент для фиксации блока в шлифовальном аппарате (отвёртка)




11. Инструмент для фиксации / замены фрезы (ключ)




12. Набор для чистки блока шлифовального (палочка деревянная – не более 50 шт., палочка пластиковая заострённая – не более 50 шт., палочка пластиковая затупленная – не более 50 шт.)

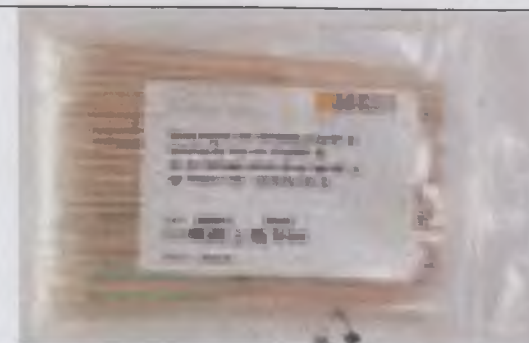

13. Открыватель крышки бака.

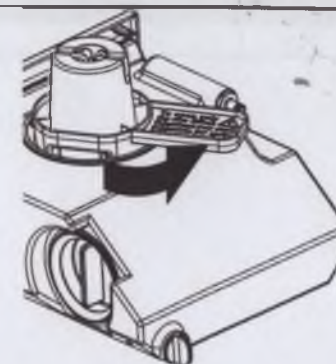

14. Сито шлифовальной камеры

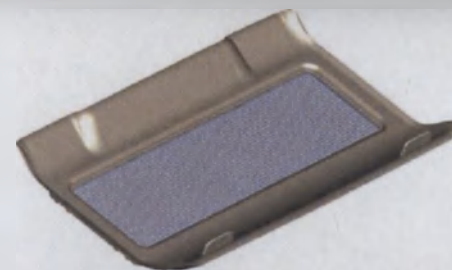

15. Контейнер для охлаждающей жидкости



16. Адаптер для держателя блока



17. Винт для фиксации блока в держателе блоков




18. Держатель для инструмента



19. Установочный винт




20. Фильтр водяной

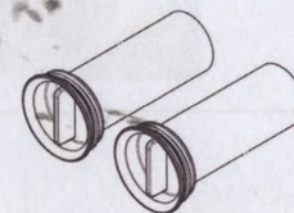

21. Модель челюсти фантомная




22. Бар-код ридер – устройство для считывания бар-кода.

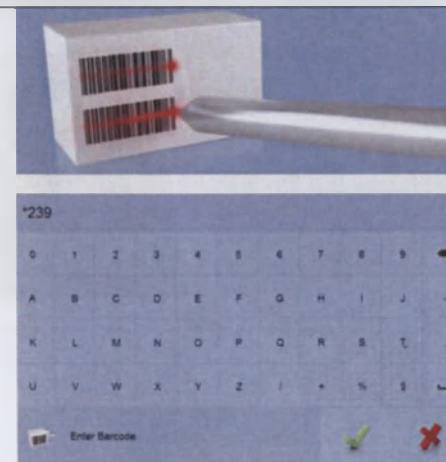

23. Гипс стоматологический «CAM – base» - объемом от 50 до 2000 гр.

24. Гипс стоматологический «CAM – base GOLD» – объемом от 50 до 2000 гр.

25. Гипс стоматологический «CEREC Stone BC» – объемом от 50 до 2000 гр.

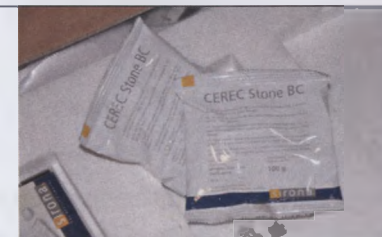

26. Стартовые наборы блоков в упаковках, варианты исполнения: CEREC Blocs PC 12 S2-PC; CEREC Blocs PC 12 S3-PC; CEREC Blocs PC 12 S4-PC; CEREC Blocs PC 14 S2-PC; CEREC Blocs PC 14 S3-PC; CEREC Blocs PC 14 S4-PC; CEREC Blocs PC 14/14 S2-PC; CEREC Blocs PC 14/14 S3-PC; CEREC Blocs PC 14/14 S4-PC; inCoris CC Maxi L; inCoris CC Maxi S; inCoris CC Medi; inCoris CC Mono; CEREC Blocs C In BL1; CEREC Blocs C In A1; CEREC Blocs C In A2; CEREC Blocs C In A3; CEREC Blocs C In A 3,5; CEREC Blocs C In A4; CEREC Blocs C In C2; CEREC Blocs C In C3; CEREC Blocs C In B2; CEREC Blocs C In B3; CEREC Blocs C In D4



27. Набор стартовый для изготовления реставраций «CEREC Blocs Sample Package»:

27.1. Материалы стоматологические для изготовления керамических реставраций и протезов CEREC Blocs – не более 44 шт.;

27.2. Шкала расцветок «CEREC Blocs Shade Guide» в составе палитры с образцами цветов «Ceramics for CEREC» – не более 2 шт.



28. Набор стартовый для изготовления моделей «Starter Kit Model Milling inLab»:

28.1. Материалы стоматологические для изготовления моделей зубов:

- Блок inCoris Model S - не более 40 шт;
- Блок inCoris Model L - не более 20 шт.

28.2. Фрезы:

- Фреза Finisher 10 - не более 30 шт;
- Фреза Shaper 25 - не более 30 шт.

28.3. Артикуляторы:

- Артикулятор (держатель) CEREC Connect Articulator Quadrant для квадранта челюсти - не более 5 шт;
- Артикулятор (держатель) CEREC Connect Articulator full arch для полной дуги челюсти - не более 5 шт.

28.4. Панели для модели CEREC Connect:

- Панель для квадранта челюсти - не более 40 шт;
- Панель для полной дуги челюсти - не более 20 шт.

28.5. Штифтовой фиксатор высоты прикуса - не более 24 шт.

28.6. Винтовой штифт (пин) для закрепления модели CEREC Connect - не более 4000 шт.

28.7. Инструмент для закрепления винтовых штифтов (пинов) - не более 2 шт.

28.8. Ключ для закрепления фрез - не более 2 шт.

28.9. Отвертка динамометрическая для закрепления блоков - не более 2 шт.

Набор Starter Kit Model Milling inLab содержит полный набор принадлежностей для изготовления моделей зубов (аналог гипсовых моделей), полной дуги челюсти и сегмента (квадранта) зубного ряда, на шлифовальном станке inLab MC XL.




Модель челюсти изготавливается из пластиковых блоков на станке inLab MC XL при помощи концевых фрез Shaper и Finisher. Затем в изготовленную модель вкручиваются винтовые штифты (пины), при помощи которых она фиксируется на специальные панели. Далее две панели с моделями нижней и верхней челюсти крепятся в артикулятор («лягушку»).



Состав:

- Блоки inCoris Model S/L – пластиковые блоки для изготовления моделей зубов (аналог гипсовых моделей), размер S – 22×40×65 (мм), размер L – 22×40×85 (мм)

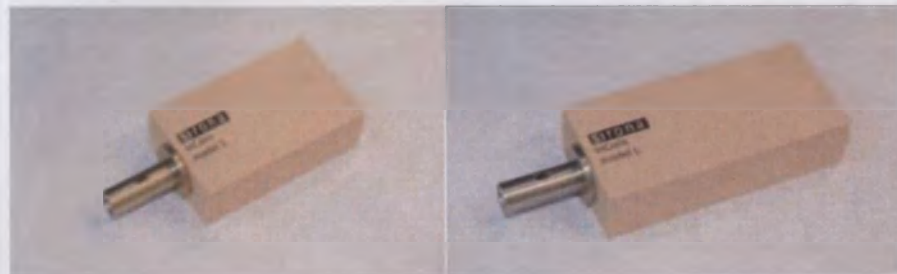

- Фреза Finisher 10 – фреза концевая цилиндрической формы для изготовления моделей зубов (аналог гипсовых моделей) на шлифовальном станке inLab MC XL



- Фреза Shaper 25 – фреза концевая цилиндрической формы для изготовления

моделей зубов (аналог гипсовых моделей) на шлифовальном станке inLab MC XL



· Артикулятор (держатель) CEREC Connect Articulator Quadrant для квадранта Челюсти




· Артикулятор (держатель) CEREC Connect Articulator full arch для полной дуги Челюсти




· Панель для модели CEREC Connect для квадранта челюсти (не более 40 шт.)



· Панель для модели CEREC Connect для полной дуги челюсти

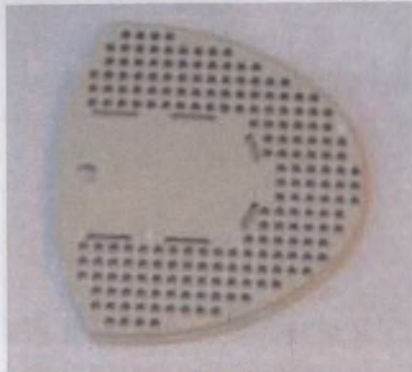

· Штифтовой фиксатор высоты прикуса (выделен на рисунке)

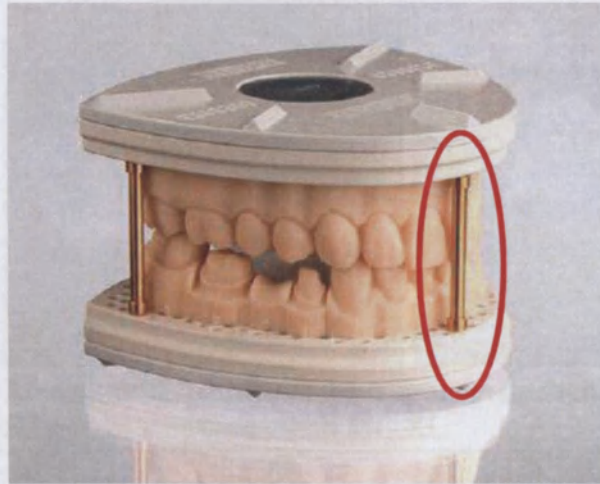

· Винтовые штифты (пины) для закрепления модели CEREC Connect – штифты, при помощи которых изготовленная на станке модель челюсти крепится к панели для модели.



· Инструмент для закрепления винтовых штифтов (пинов) – специальный инструмент для фиксации винтовых штифтов в изготовленную модель челюсти.



Ключ для закрепления фрез – специальный ключ для фиксации фрез Finisher 10 и Shaper 25 в станок inLab MC XL



· Отвертка динамометрическая для закрепления блоков – отвертка для фиксации блоков inCoris Model L/S в станок inLab MC XL




29. Набор стартовый «inCoris Intro-Kit»:


29.1. Материалы стоматологические для изготовления керамических реставраций и протезов CEREC Blocs - не более 12 шт.

29.2. Материалы стоматологические для изготовления керамических реставраций и протезов inCoris ZI - не более 18 шт.

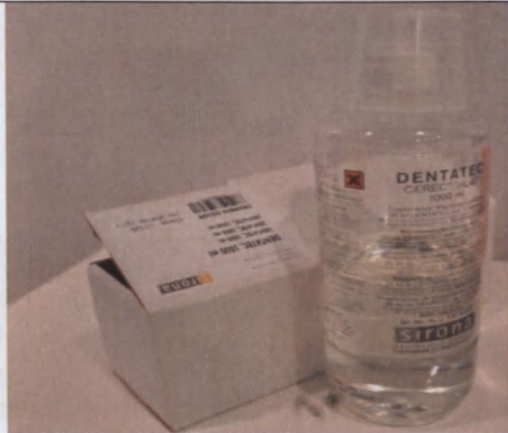

	
30. Средство DENTATEC объемом от 250 до 1000 мл	
31. Средство CEREC Optispray для проведения оптических измерений в формате 3D объемом от 50 до 200 мл	

32. Соединительный кабель	
33. Кабель питания	
34. Электронный носитель с данными	 
35. Ключ inLab 3D AK 100	
36. Ключ inLab 3D AK Unlimited	

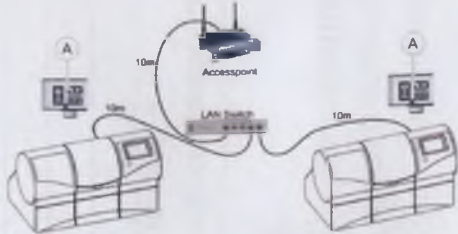37. Конверт с кодом License Voucher	
38. Коммутатор сетевой специальный	
39. USB накопитель лицензий	
40. Техническая документация	

Генеральный директор
ООО «Сирона Денталь Системс»



М. В. Кротенко

Ген.директор ООО «Сирона»
Денгаль Михаил
Хроменко М. В.

