


Галогенератор АГГ- 01 – аэротерапевтический аппарат, предназначенный для создания воздушных дыхательных смесей, содержащих высокодисперсные аэрозоли. Аппарат применяется для групповых ингаляций в специально оборудованном помещении – ГАЛОКАМЕРЕ.

Рисунок 1.

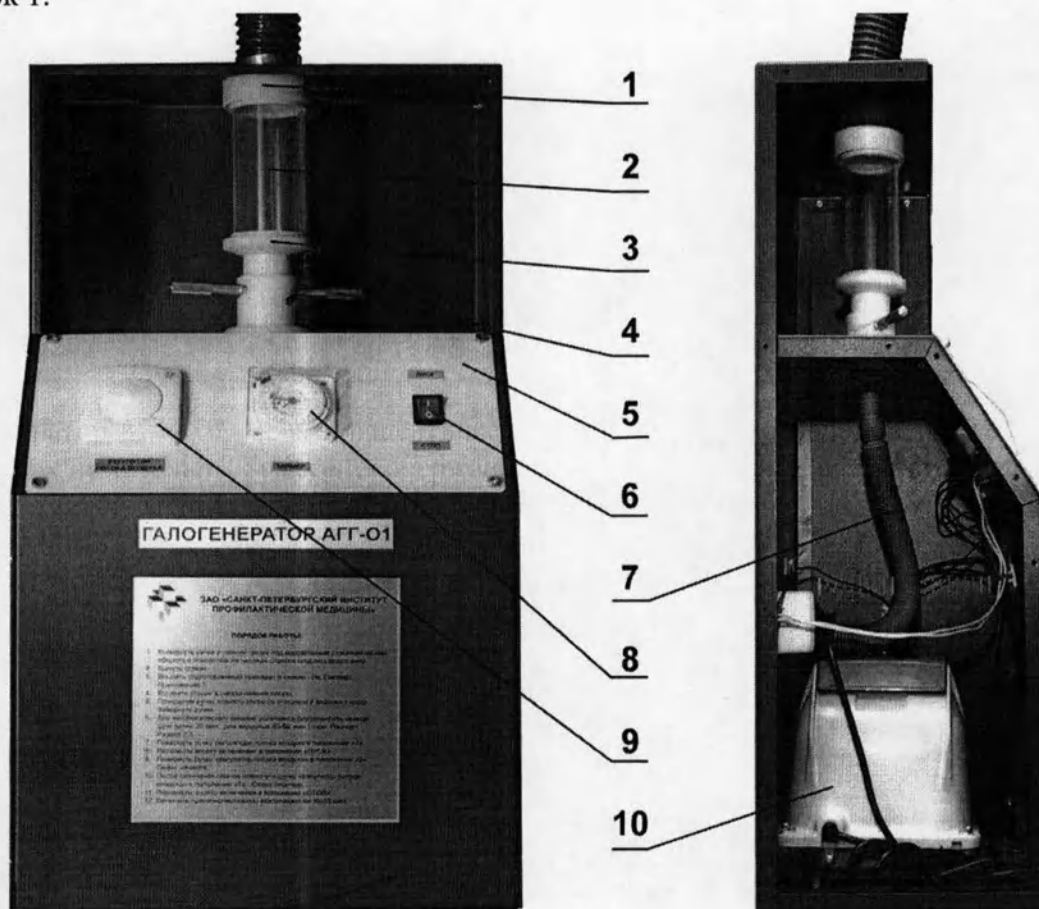

№.№	Наименование
1	Верхнее гнездо
2	Стакан
3	Нижняя опора стакана
4	Механизм подъема нижней опоры стакана
5	Лицевая панель
6	Клавиша «ПУСК\СТОП»
7	Резиновый шланг
8	Таймер
9	Регулятор потока воздуха
10	Воздуходувка EL-120


1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА АППАРАТА

- 1.1. Электропитание от сети переменного тока, частотой 50 Гц и напряжением 220В.
- 1.2. Электрическая мощность, потребляемая генератором, не более 200 Вт.
- 1.3. Производительность воздуходувки не менее 120 литров в минуту.
- 1.4. Коэффициент шума не более 60 Дб.
- 1.5. Эксплуатация установки в закрытых помещениях при температуре от +15°C до +25°C, при влажности не выше 65%.
- 1.6. Комплектность поставки:
 - Галогенератор АГГ-01 в сборе – 1 шт.
 - Шнур соединительный сетевой – 1 шт.

Галогенератор АГГ- 03 – аэротерапевтический аппарат, предназначенный для создания воздушных дыхательных смесей, содержащих высокодисперсные аэрозоли.

Аппарат применяется для групповых ингаляций в специально оборудованном помещении – ГАЛОКАМЕРЕ.

Рисунок 1.

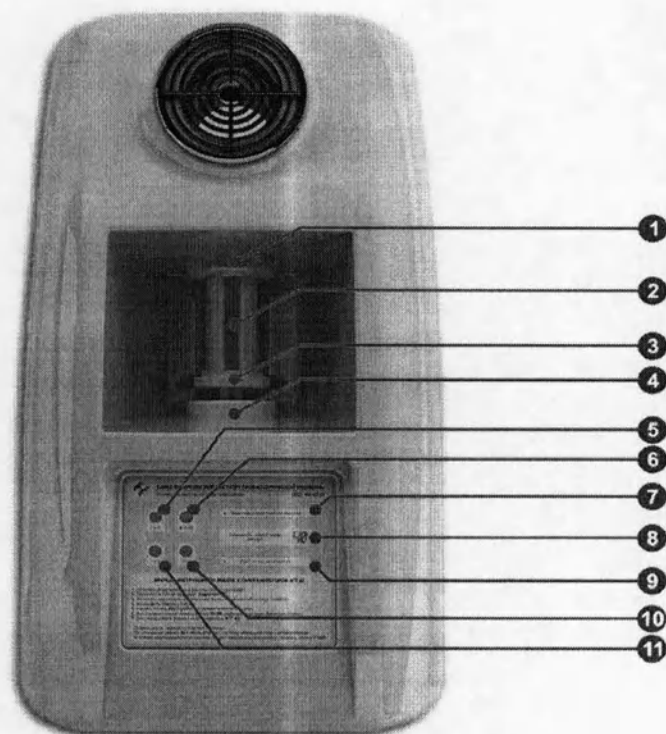

№№	Наименование
1	Верхнее гнездо стакана
2	Аэрозольный стакан с манжетами и сеткой
3	Нижнее гнездо стакана с упором
4	Пружинный механизм нижнего гнезда стакана
5	Кнопка «ВКЛ» (включение аппарата в режиме очистки воздуха)
6	Кнопка «ВЫКЛ» (отключение аппарата)
7	Индикация состояния аппарата
8	Электронный таймер обратного отсчета
9	Индикация состояния системы Кипящий слой™
10	Кнопка «СТОП» (отключение системы Кипящий слой™, остановка подачи аэрозоля в галокамеру и сброс таймера)
11	Кнопка «ПУСК» (включение системы Кипящий слой™, пуск подачи аэрозоля в галокамеру)