


УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ВЕДСЛАВА»

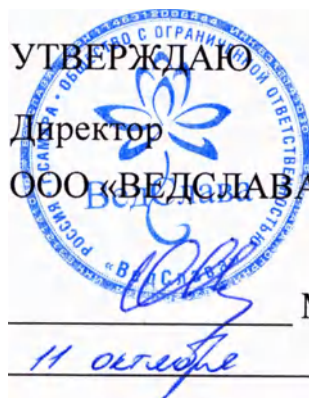

Моргункова О.С.

2018 г.

МЕШОК ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПВД
по ТУ 32.50.50-001-33538973-2018

Инструкция по применению
ВЕДС.942437.001 ИП

г. Самара

2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	9
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	16
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	18
5 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	18
6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	19
7 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	19
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	20
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	21
10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	22
11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	23
ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	25

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 3 из 43

Настоящая инструкция распространяется на Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД по ТУ 32.50.50-001-33538973-2018 (далее – мешок) и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках мешков, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения мешков, отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования мешков, необходимо обращаться к изготовителю:

ООО «ВЕДСЛАВА»
 Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50
 Тел.: 8 (846) 221-64-56
 E-mail: ved.slava@mail.ru

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 4 из 43

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение и условия применения

Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД (далее – мешок) предназначен для транспортировки и временного хранения тел умерших или их частей.

Условия применения – медицинские учреждения, в том числе в отделениях судебно-медицинской экспертизы, специальных служб и МЧС.

Мешок относится к изделиям для однократного применения.

Мешки изготавливаются нескольких исполнений:

- мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, без молнии, без ручек;
- мешок патологоанатомический из ПВД, на молнии по трем сторонам, без ручек;
- мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД с боковыми фальцами, на молнии, без ручек;
- мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, на молнии, без ручек;
- мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД на молнии типа «С», с ручками «Евростандарт»;
- мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»;
- мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД на молнии, с ручками «Евростандарт».

В зависимости от потенциального риска применения мешок относится к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Вид мешков в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 301720 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям мешок относится к виду УХЛ1.1 по ГОСТ 15150-69.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации мешок относится к группе 3 по ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации мешки относятся к классу Г по ГОСТ Р 50444-92.

ООО «ВЕДСЛАВА» · Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 5 из 43

1.2. Потребители

Специализированный персонал медицинских учреждений, отделений судебно-медицинской экспертизы, специальных служб и МЧС, который ознакомлен с настоящей инструкцией по применению.

1.3. Показания

- транспортирование и временное хранение тел умерших или их частей.

1.4. Противопоказания

- противопоказания отсутствуют.

1.5. Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции по применению и показаний к применению.

1.6. Меры предосторожности

Внимание!

- Используйте мешок только в соответствии с данной инструкцией.
- Не используйте мешок повторно. Мешок относится к изделиям для однократного применения.
- Не используйте мешок при наличии на изделии запрессованных складок (не расправляющихся), прожженных мест, трещин, разрывов, порезов, дыр, проколов, посторонних пятен и пробелов, а также при наличии слипания внутренних поверхностей.

1.7. Общий вид изделия

Мешки предназначены для транспортировки и временного хранения тел умерших или их частей медицинскими учреждениями, в том числе отделениями судебно-медицинской экспертизы, специальными службами и МЧС.

Мешки патологоанатомические позволяют безопасно и гигиенично организовать перевозку и временное хранение тел умерших людей.

Мешок патологоанатомический изготавливается из полиэтилена высокого давления (ПВД) толщиной 150, 170, 180, 200 и 210 мкм, непрозрачного черного цвета; имеет герметичные сварные швы. Края мешка также дополнительно прошиты специальной технической лентой.

Применяемые толщины пленок, а также прошивка специальной технической лентой позволяют осуществлять транспортирование и хранение тела массой не менее 100 кг.

Мешки патологоанатомические имеют следующие особенности:

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 6 из 43

- Герметичность.
- Высокая прочность материала. Толщина одной стенки мешка 150-210 мкм.
- Размеры мешков позволяют вместить даже крупное тело.
- Устойчивость к температурным воздействиям.
- Мешки без ручек удобны в тех случаях, когда тело можно переложить сразу на носилки.
- Мешки с ручками - более удобный и надежный выбор в тех случаях, когда тело необходимо переносить некоторое время самостоятельно (без использования носилок).
- Наличие боковых фальцев (объемных складок по бокам) в конструкции изделия позволяет повысить вместительность мешка, в результате чего возможна транспортировка тел различной комплекции. Благодаря наличию фальцев мешок можно компактно складывать.
- Мешок с молнией обеспечивает герметичность изделия, а также удобство при его использовании. В зависимости от конструкции изделия на молнии, её расположение может быть по центру или по периметру изделия.

Конструкция и массогабаритные параметры мешков приведены в Приложении А.

В зависимости от исполнения мешок может быть изготовлен с молнией, фальцами, ручками или без них (рисунок 1-7).




Рисунок 1 - Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, без молнии, без ручек



Рисунок 2 - Мешок патологоанатомический из ПВД, на молнии по трем сторонам, без ручек



Рисунок 3 - мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД с боковыми фальцами, на молнии, без ручек

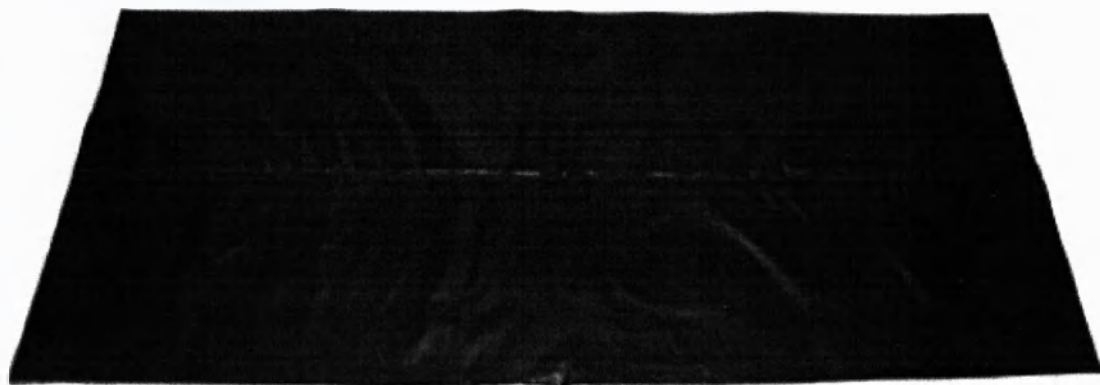


Рисунок 4 - мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, на молнии, без ручек

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 8 из 43

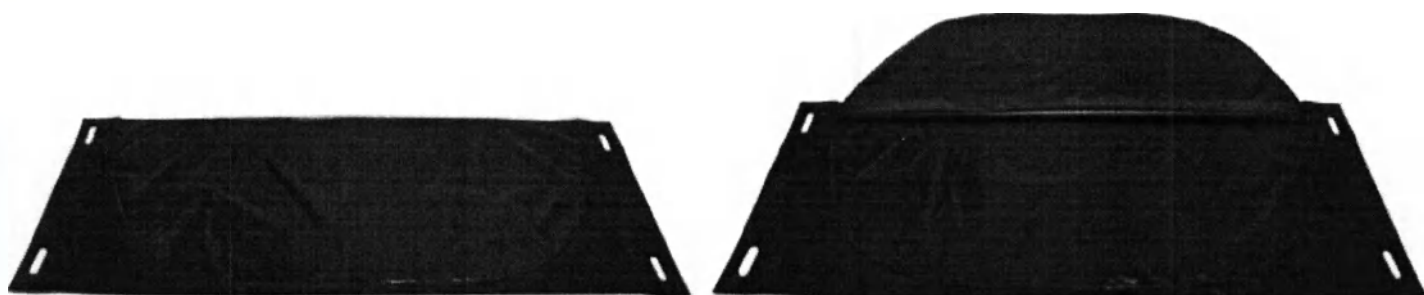


Рисунок 5 - мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД на молнии типа «С», с ручками «Евростандарт»



Рисунок 6 - мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»



Рисунок 7 - мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД на молнии, с ручками «Евростандарт»

Мешки одного исполнения и размера упаковываются в групповую упаковку по 10 или 20 штук (по согласованию с заказчиком).

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 9 из 43

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основные параметры и характеристики

2.1.1. Мешок соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, технических условий ТУ 32.50.50-001-33538973-2018, комплекту конструкторской документации ВЕДС.942437.001, утвержденной в установленном порядке.

Полный (номенклатурный) перечень изделий приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Полный (номенклатурный) перечень изделий

№	Наименование	Толщина одной стенки мешка, мкм	Поверхностная плотность, г/м ²	Максимальная допустимая нагрузка, не менее, кг	№ рисунка (Приложение А)
1	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, без молнии, без ручек	150	137	100	Рис.А.1
2	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, без молнии, без ручек	170	155	110	
3	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, без молнии, без ручек	180	164	120	
4	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, без молнии, без ручек	200	183	130	
5	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, без молнии, без ручек	210	192	140	
6	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, на молнии, без ручек	150	137	100	Рис.А.2
7	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, на молнии, без ручек	170	155	110	
8	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, на молнии, без ручек	180	164	120	
9	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, на молнии, без ручек	200	183	130	
10	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, на молнии, без ручек	210	192	140	
11	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, на молнии по трём сторонам, без ручек	150	137	100	Рис.А.3
12	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, на молнии по трём сторонам, без ручек	170	155	110	
13	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, на молнии по трём сторонам, без ручек	180	164	120	
14	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, на молнии по трём сторонам, без ручек	200	183	130	

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 10 из 43

Таблица 1 (продолжение)

№	Наименование	Толщина одной стенки мешка, мкм	Поверх- ностная плотность, г/м ²	Максимальная допустимая нагрузка, не менее, кг	№ рисунка (Приложение А)
15	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, на молнии по трём сторонам, без ручек	210	192	140	Рис.А.3
16	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек	150	137	100	Рис.А.4
17	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек	170	155	110	
18	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек	180	164	120	
19	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек	200	183	130	
20	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек	210	192	140	
21	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, на молнии типа «С», с ручками «Евростандарт»	150	137	100	Рис.А.5
22	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, на молнии типа «С», с ручками «Евростандарт»	170	155	110	
23	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, на молнии типа «С», с ручками «Евростандарт»	180	164	120	
24	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, на молнии типа «С», с ручками «Евростандарт»	200	183	130	
25	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, на молнии типа «С», с ручками «Евростандарт»	210	192	140	
26	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»	150	137	100	Рис.А.6
27	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»	170	155	110	
28	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»	180	164	120	

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 11 из 43

Таблица 1 (продолжение)

№	Наименование	Толщина одной стенки мешка, мкм	Поверхностная плотность, г/м ²	Максимальная допустимая нагрузка, не менее, кг	№ рисунка (Приложение А)
29	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»	200	183	130	Рис.А.6
30	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»	210	192	140	
31	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»	150	137	100	Рис.А.7
32	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»	170	155	110	
33	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»	180	164	120	
34	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»	200	183	130	
35	Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»	210	192	140	

2.1.2. Толщина одной стенки мешка соответствует значениям, указанным в таблице 1. Допускаемое предельное отклонение от номинальной толщины пленки $\pm 20\%$.

2.1.2.1. Показатели поверхностной плотности пленки в зависимости от толщины изделия соответствуют значениям, указанным в таблице 1. Допускаемое отклонение по поверхностной плотности: $\pm 12\%$.

2.1.3. Максимальная допустимая нагрузка соответствует значениям таблицы 1.

2.1.4. Основные массогабаритные параметры изделий соответствуют значениям, указанным в таблицах А.1 – А.7 Приложения А. Допускаемое отклонение размеров ± 10 мм. Допускаемое отклонение по ширине фальца $\pm 5\%$. Допускаемое отклонение массы $\pm 10\%$.

2.1.5. Цвет мешка черный.

2.1.6. Окраска мешка однотонная по всей поверхности изделия, без посторонних пятен и пробелов.

2.1.7. На поверхности мешка отсутствуют трещины, разрывы, порезы, дыры и проколы.

2.1.8. Мешки не имеют слипания внутренних поверхностей.

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 12 из 43

2.1.9. Мешки имеют сварные швы шириной не более 10 мм.

2.1.10. Сварные швы мешков герметичные, ровные по всей длине, без прожженных мест и складок.

1.1.10.1 Края мешка дополнительно прошиты специальной технической лентой для герметичности.

2.1.11. Прочность сварного шва мешка не менее 0,7 показателя прочности при растяжении пленки.

2.1.12. По физико-механическим показателям используемая полиэтиленовая пленка высокого давления для изготовления мешков соответствует требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-механические характеристики пленки высокого давления

№	Наименование показателя	Значение
1	Прочность при растяжении, Мпа:	-
1.1.	- в продольном направлении, не менее	14,7
1.2	- в поперечном направлении, не менее	13,7
2	Относительное удлинение при разрыве, %:	-
2.1	- в продольном направлении, не менее	300
2.2	- в поперечном направлении, не менее	400

Примечание: Согласно ГОСТ 10354-82 допускается снижение показателей прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве на 10%, т.к. в процессе изготовления полиэтиленовой пленки используется добавка вида «П» (П1901/22-ПЭ).

2.1.13. Мешок при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ1.1 по ГОСТ 15150-69.

2.1.14. Мешок обладает устойчивостью к механическим воздействиям при эксплуатации, соответствующим требованиям к изделиям группы 3 по ГОСТ Р 50444-92.

2.1.15. Мешок в транспортной упаковке обладает устойчивостью к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69: при транспортировании для условий хранения 5; при хранении для условий хранения 2.

2.1.16. Мешок в транспортной упаковке обладает устойчивостью к механическим воздействиям при транспортировании, соответствующим требованиям ГОСТ Р 50444-92.

2.2. Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении мешка, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материа-

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 13 из 43

лы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве мешков, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013.

2.2.3 Для изготовления мешков используются сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 3.

Таблица 3 – Сырье, материалы и покупные изделия для изготовления мешка

№	Наименование изделия, его частей	Наименование, марка, изготовитель материала
1	Пленка полиэтиленовая высокого давления (ПВД), в т.ч. ручки «Евростандарт» Цвет: черный	Полиэтилен высокого давления марки 15803-020 по ГОСТ 16337-77, производства ООО «ДМ-ПЛАСТ», Россия
		Концентрат черный «БАСКО» марки П1901/22-ПЭ по ТУ 2243-001-23124265-2000, производства ООО НПФ «БАРС-2», Россия
2	Застежка-молния:	
2.1	Текстильные ленты (тесьма)	Полиэстер марки В-422, производства Cmz Zipper (Wuxi) Co., Ltd, Китай
2.2	Звенья	Нержавеющая сталь марки AISI 304, производства Cmz Zipper (Wuxi) Co., Ltd, Китай
2.3	Бегунок (замок)	Нержавеющая сталь марки AISI 304, производства Cmz Zipper (Wuxi) Co., Ltd, Китай
3	Техническая лента	Лента полиэфирная 4316, производства ООО «Фи-текс», Россия

2.3. Требования к надежности

2.3.1. Срок годности мешка не менее 5 лет с даты его изготовления.

2.4. Комплектность

2.4.1. В комплект поставки входит:

- Мешок одного из исполнений ВЕДС.942437.001.

- Эксплуатационная документация:

Инструкция по применению ВЕДС.942437.001 ИП.

Примечание: количество и исполнение мешков определяются при заказе по согласованию с заказчиком.

2.5. Маркировка

2.5.1. Маркировка соответствует ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 14 из 43

2.5.2. Маркировка в полном объеме нанесена на одну из сторон групповой упаковки в виде этикетки или в виде бумажного или картонного ярлыка, прикрепляемого к ней, и содержит:

- а) наименование предприятия-изготовителя, его адрес;
- б) полное наименование и размеры изделия;
- в) дату изготовления (месяц, год);
- г) слова «Использовать до...»; а также года и месяца;
- д) слова «Однократного применения»;
- е) количество изделий в упаковке (шт.);
- ж) номер партии;
- з) обозначение настоящих технических условий;
- и) отметку ОТК.

2.5.3. Допускается использование соответствующих символов ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014:

Номер партии



(номер)

«Дата изготовления»



(год/месяц)

«Использовать до...»



(год/месяц)

«Однократного применения»



2.5.4. Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикреплены к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

2.6. Упаковка

2.6.1. Упаковка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 и конструкторской документации изготовителя.

2.6.2. Мешки одного исполнения и размера упаковываются в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или ГОСТ 7933-89: по 10 или 20 штук (по согласованию с заказчиком), или иную тару, изготовленную по действующей нормативно-технической документации. Ящики оклеены лентой по ГОСТ 18251-87 или ГОСТ 20477-86.

2.6.3. Эксплуатационная документация помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и уложена в ящик.

2.6.4. Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту мешков от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 15 из 43

хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

2.6.5. Масса мешков в транспортной таре не более 30 кг.

2.7. Требования безопасности

2.7.1. Мешки соответствуют требованиям токсикологической, санитарно-химической и биологической безопасности в соответствии с требованиями серии стандартов ГОСТ ISO 10993-2011, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 16 из 43

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения

 Каждая партия мешков проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством изделия.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния мешков, чтобы убедиться в отсутствии различных повреждений. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

 Запрещается повторное использование мешка.

 Запрещается использовать мешок как средство для погребения.

Рабочие условия окружающей среды:

Температура от минус 60 до плюс 40°C.

Относительная влажность воздуха: до 98%.

3.2 Подготовка к эксплуатации

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием мешков с целью соблюдения мер безопасности при работе с трупным материалом, персонал, чья деятельность связана с вывозом (транспортированием) тел умерших, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

3.3 Порядок работы с изделием

- Раскройте упаковочный материал (групповую упаковку), достаньте мешок.
- Расправьте мешок и расстегните молнию, при наличии.
- Расположите мешок в непосредственной близости к эвакуируемому телу или его части (фрагменту).
- Аккуратно поместите тело умершего или его части в мешок.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке мешка свыше веса, указанного в таблице 1, рекомендовано использовать носилки. Мешки без ручек так же используются в тех случаях, когда тело можно переложить сразу на носилки.

- Застегните нагруженный (заполненный) мешок и убедитесь в его надежности, перед тем как приступить к его перемещению или транспортированию. При отсутствии молнии

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 17 из 43

необходимо зафиксировать край мешка таким образом, чтобы избежать контакта с телом умершего или его биологической жидкостью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Упаковка (эвакуация) умершего лица или его части должна производиться в соответствии с должностной инструкцией специализированного рабочего.

 В своей деятельности специализированный персонал медицинских учреждений, отделений судебно-медицинской экспертизы, специальных служб и МЧС, ознакомленный с настоящей инструкцией по применению, обязан руководствоваться Положением о порядке транспортировки в морги умерших (погибших) граждан с мест их обнаружения на территории муниципального образования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Положение устанавливает единый порядок транспортировки на территории муниципального образования тел граждан, умерших в учреждениях здравоохранения, а также умерших (погибших) с мест их обнаружения в учреждения судебно-медицинской экспертизы для судебно-медицинского исследования (экспертизы), а также в морги учреждений здравоохранения и иные трупохранилища, расположенные на территории муниципального образования, для сохранения.

 **Внимание!** Мешок является изделием одноразового применения, после которого он подлежит утилизации.

 **Внимание!** После использования никогда не мойте или повторно не используйте мешок.

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 18 из 43

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование и хранение мешков должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92.

Транспортирование мешков может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

4.2 Условия транспортирования мешков должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%).

4.3 Условия хранения мешков в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности до 98%).

5 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.7.2790-10.

5.2 Мешок, не загрязненный биологической жидкостью после использования, относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

5.3 Мешок, загрязненный биологической жидкостью после использования, относится к медицинским отходам класса Б – эпидемиологически опасные отходы, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Примечание: Повторное использование мешка запрещено. Мешок подлежит утилизации.

5.4 Неиспользованный мешок так же подлежит утилизации как отходы класса А в случаях:

- окончания срока годности;
- повреждений, свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

5.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 19 из 43

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Использование мешка должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

6.2 Использованные изделия повторному применению не подлежат.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

7.1 Изделие для однократного применения в процессе эксплуатации не подлежит техническому обслуживанию, восстановлению и ремонту. После использования изделие подлежит утилизации. Повторное использование запрещено.

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 20 из 43

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД производства ООО «ВЕДСЛАВА»

Исполнение _____ Размер _____

Номер партии _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(Дата)

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 21 из 43

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД

Исполнение _____ Размер _____

Номер партии _____

упакован на предприятии-изготовителе ООО «ВЕДСЛАВА» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
 (личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 22 из 43

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование и номер партии изделия;
- дата получения изделия от предприятия-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения и т.д.

Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 23 из 43

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие мешка требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок изделия указан в инструкции и исчисляется с даты изготовления. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.
- Несовпадения номера партии изделия с гарантийным талоном.

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 24 из 43

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД

Исполнение _____ Размер _____

Номер партии _____

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец _____
(подпись, печать)

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 25 из 43

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Конструкция и массогабаритные параметры

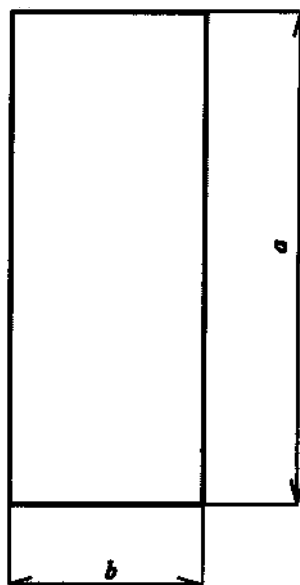


Рисунок А.1 - Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, без молнии, без ручек

Таблица А.1 - Массогабаритные параметры. Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, без молнии, без ручек

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, без молнии, без ручек	900	2100	510
	900	2200	540
	900	2300	570
	900	2400	600
	1000	2100	570
	1000	2200	600
	1000	2300	630
	1000	2400	660
	1100	2100	630
	1100	2200	660
	1100	2300	690
	1100	2400	720
	1200	2100	690
	1200	2200	720
	1200	2300	750
	1200	2400	790

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 26 из 43

Таблица А.1 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, без молнии, без ручек	900	2100	585
	900	2200	610
	900	2300	640
	900	2400	670
	1000	2100	650
	1000	2200	680
	1000	2300	700
	1000	2400	740
	1100	2100	715
	1100	2200	750
	1100	2300	780
	1100	2400	820
	1200	2100	780
	1200	2200	820
	1200	2300	850
	1200	2400	900
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, без молнии, без ручек	900	2100	620
	900	2200	650
	900	2300	680
	900	2400	700
	1000	2100	680
	1000	2200	720
	1000	2300	750
	1000	2400	790
	1100	2100	760
	1100	2200	800
	1100	2300	830
	1100	2400	870
	1200	2100	830
	1200	2200	870
	1200	2300	900
	1200	2400	950

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 27 из 43

Таблица А.1 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, без молнии, без ручек	900	2100	690
	900	2200	720
	900	2300	760
	900	2400	790
	1000	2100	770
	1000	2200	800
	1000	2300	840
	1000	2400	880
	1100	2100	840
	1100	2200	880
	1100	2300	920
	1100	2400	960
	1200	2100	920
	1200	2200	960
	1200	2300	1000
	1200	2400	1050
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, без молнии, без ручек	900	2100	730
	900	2200	760
	900	2300	800
	900	2400	830
	1000	2100	800
	1000	2200	840
	1000	2300	880
	1000	2400	920
	1100	2100	890
	1100	2200	930
	1100	2300	970
	1100	2400	1000
	1200	2100	970
	1200	2200	1000
	1200	2300	1060
	1200	2400	1100

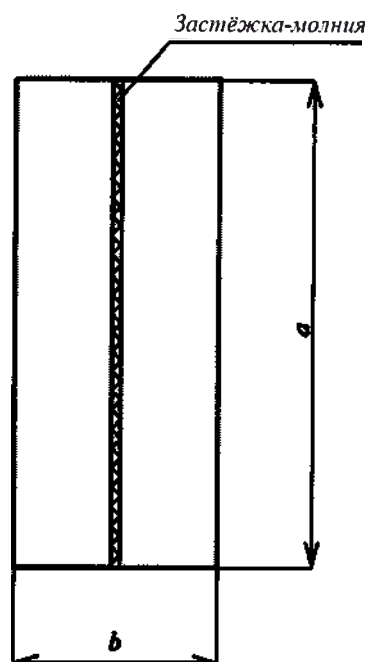


Рисунок А.2 - Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, на молнии, без ручек

Таблица А.2 - Массогабаритные параметры. Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, на молнии, без ручек

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, на молнии, без ручек	900	2100	510	2100
	900	2200	540	2200
	900	2300	570	2300
	900	2400	600	2400
	1000	2100	570	2100
	1000	2200	600	2200
	1000	2300	630	2300
	1000	2400	660	2400
	1100	2100	630	2100
	1100	2200	660	2200
	1100	2300	690	2300
	1100	2400	720	2400
	1200	2100	690	2100
	1200	2200	720	2200
	1200	2300	750	2300
	1200	2400	790	2400

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 29 из 43

Таблица А.2 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, на молнии, без ручек	900	2100	585	2100
	900	2200	610	2200
	900	2300	640	2300
	900	2400	670	2400
	1000	2100	650	2100
	1000	2200	680	2200
	1000	2300	700	2300
	1000	2400	740	2400
	1100	2100	715	2100
	1100	2200	750	2200
	1100	2300	780	2300
	1100	2400	820	2400
	1200	2100	780	2100
	1200	2200	820	2200
	1200	2300	850	2300
	1200	2400	900	2400
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, на молнии, без ручек	900	2100	620	2100
	900	2200	650	2200
	900	2300	680	2300
	900	2400	700	2400
	1000	2100	680	2100
	1000	2200	720	2200
	1000	2300	750	2300
	1000	2400	790	2400
	1100	2100	760	2100
	1100	2200	800	2200
	1100	2300	830	2300
	1100	2400	870	2400
	1200	2100	830	2100
	1200	2200	870	2200
	1200	2300	900	2300
	1200	2400	950	2400

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 30 из 43

Таблица А.2 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, на молнии, без ручек	900	2100	690	2100
	900	2200	720	2200
	900	2300	760	2300
	900	2400	790	2400
	1000	2100	770	2100
	1000	2200	800	2200
	1000	2300	840	2300
	1000	2400	880	2400
	1100	2100	840	2100
	1100	2200	880	2200
	1100	2300	920	2300
	1100	2400	960	2400
	1200	2100	920	2100
	1200	2200	960	2200
	1200	2300	1000	2300
	1200	2400	1050	2400
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, на молнии, без ручек	900	2100	730	2100
	900	2200	760	2200
	900	2300	800	2300
	900	2400	830	2400
	1000	2100	800	2100
	1000	2200	840	2200
	1000	2300	880	2300
	1000	2400	920	2400
	1100	2100	890	2100
	1100	2200	930	2200
	1100	2300	970	2300
	1100	2400	1000	2400
	1200	2100	970	2100
	1200	2200	1000	2200
	1200	2300	1060	2300
	1200	2400	1100	2400

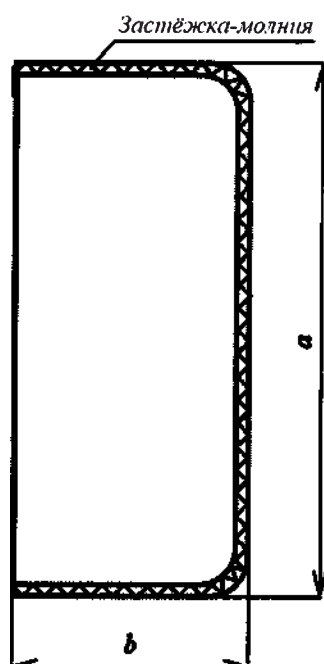


Рисунок А.3 - Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД на молнии по трём сторонам, без ручек

Таблица А.3 - Массогабаритные параметры. Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД на молнии по трём сторонам, без ручек

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, на молнии по трём сторонам, без ручек	900	2100	510	3900
	900	2200	540	4000
	900	2300	570	4100
	900	2400	600	4200
	1000	2100	570	4100
	1000	2200	600	4200
	1000	2300	630	4300
	1000	2400	660	4400
	1100	2100	630	4300
	1100	2200	660	4400
	1100	2300	690	4500
	1100	2400	720	4600
	1200	2100	690	4500
	1200	2200	720	4600
	1200	2300	750	4700
	1200	2400	790	4800

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 32 из 43

Таблица А.3 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, на молнии по трём сторонам, без ручек	900	2100	585	3900
	900	2200	610	4000
	900	2300	640	4100
	900	2400	670	4200
	1000	2100	650	4100
	1000	2200	680	4200
	1000	2300	700	4300
	1000	2400	740	4400
	1100	2100	715	4300
	1100	2200	750	4400
	1100	2300	780	4500
	1100	2400	820	4600
	1200	2100	780	4500
	1200	2200	820	4600
	1200	2300	850	4700
	1200	2400	900	4800
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, на молнии по трём сторонам, без ручек	900	2100	620	3900
	900	2200	650	4000
	900	2300	680	4100
	900	2400	700	4200
	1000	2100	680	4100
	1000	2200	720	4200
	1000	2300	750	4300
	1000	2400	790	4400
	1100	2100	760	4300
	1100	2200	800	4400
	1100	2300	830	4500
	1100	2400	870	4600
	1200	2100	830	4500
	1200	2200	870	4600
	1200	2300	900	4700
	1200	2400	950	4800

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 33 из 43

Таблица А.3 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, на молнии по трём сторонам, без ручек	900	2100	690	3900
	900	2200	720	4000
	900	2300	760	4100
	900	2400	790	4200
	1000	2100	770	4100
	1000	2200	800	4200
	1000	2300	840	4300
	1000	2400	880	4400
	1100	2100	840	4300
	1100	2200	880	4400
	1100	2300	920	4500
	1100	2400	960	4600
	1200	2100	920	4500
	1200	2200	960	4600
	1200	2300	1000	4700
	1200	2400	1050	4800
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, на молнии по трём сторонам, без ручек	900	2100	730	3900
	900	2200	760	4000
	900	2300	800	4100
	900	2400	830	4200
	1000	2100	800	4100
	1000	2200	840	4200
	1000	2300	880	4300
	1000	2400	920	4400
	1100	2100	890	4300
	1100	2200	930	4400
	1100	2300	970	4500
	1100	2400	1000	4600
	1200	2100	970	4500
	1200	2200	1000	4600
	1200	2300	1060	4700
	1200	2400	1100	4800

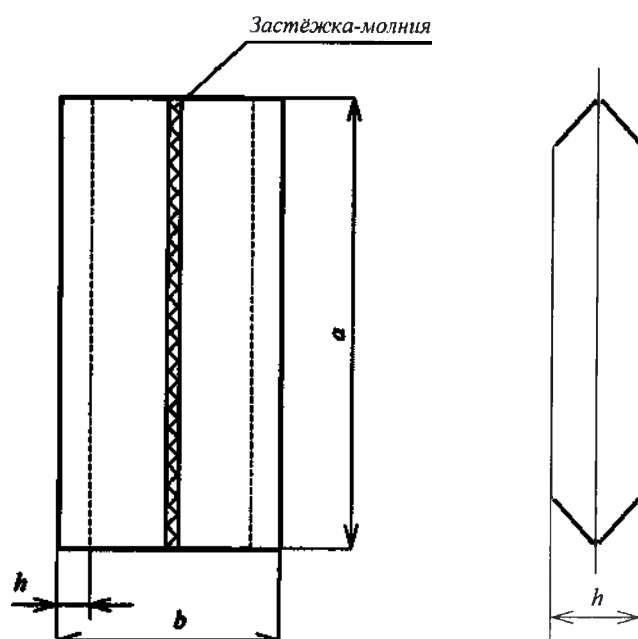


Рисунок А.4 - Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек

Таблица А.4 - Массогабаритные параметры. Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии, мм	Размер бокового фальца h, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек	700	2100	570	2100	150
	700	2200	600	2200	
	700	2300	630	2300	
	700	2400	660	2400	
	800	2100	630	2100	
	800	2200	660	2200	
	800	2300	690	2300	
	800	2400	720	2400	
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек	700	2100	650	2100	150
	700	2200	680	2200	
	700	2300	700	2300	
	700	2400	740	2400	
	800	2100	715	2100	
	800	2200	750	2200	
	800	2300	780	2300	
	800	2400	820	2400	

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 35 из 43

Таблица А.4 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии, мм	Размер бокового фальца h, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек	700	2100	680	2100	150
	700	2200	720	2200	
	700	2300	750	2300	
	700	2400	790	2400	
	800	2100	760	2100	
	800	2200	800	2200	
	800	2300	830	2300	
	800	2400	870	2400	
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек	700	2100	770	2100	150
	700	2200	800	2200	
	700	2300	840	2300	
	700	2400	880	2400	
	800	2100	840	2100	
	800	2200	880	2200	
	800	2300	920	2300	
	800	2400	960	2400	
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, без ручек	700	2100	800	2100	150
	700	2200	840	2200	
	700	2300	880	2300	
	700	2400	920	2400	
	800	2100	890	2100	
	800	2200	930	2200	
	800	2300	970	2300	
	800	2400	1000	2400	

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 36 из 43

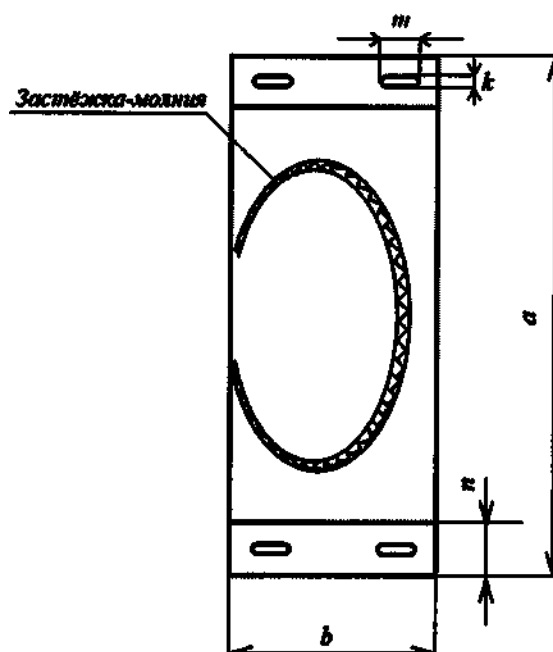


Рисунок А.5 - Массогабаритные параметры. Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, на молнии типа «С», с ручками «Евростандарт»

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии, мм	Размеры ручек (k × m), мм	Высота по- верхности для ручек n, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, на молнии типа «С», с ручками «Евростандарт»	900	2100	740	3900	30×100	150
	900	2200	740	3900		
	900	2300	740	4000		
	900	2400	740	4000		
	1000	2100	820	4100		
	1000	2200	820	4100		
	1000	2300	820	4200		
	1000	2400	820	4200		
	1100	2100	900	4300		
	1100	2200	900	4300		
	1100	2300	900	4400		
	1100	2400	900	4400		
	1200	2100	990	4400		
	1200	2200	990	4400		
	1200	2300	990	4500		
	1200	2400	990	4500		

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 37 из 43

Таблица А.5 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии, мм	Размеры ручек (k × m), мм	Высота по- верхности для ручек n, мм
Мешок патологоанатомиче- ский из полиэтилена ПВД 170 мкм, на молнии типа «С», с ручками «Евростан- дарт»	900	2100	840	3900	30×100	150
	900	2200	840	3900		
	900	2300	840	4000		
	900	2400	840	4000		
	1000	2100	930	4100		
	1000	2200	930	4100		
	1000	2300	930	4200		
	1000	2400	930	4200		
	1100	2100	1030	4300		
	1100	2200	1030	4300		
	1100	2300	1030	4400		
	1100	2400	1030	4400		
	1200	2100	1120	4400		
	1200	2200	1120	4400		
	1200	2300	1120	4500		
	1200	2400	1120	4500		
Мешок патологоанатомиче- ский из полиэтилена ПВД 180 мкм, на молнии типа «С», с ручками «Евростан- дарт»	900	2100	890	3900	30×100	150
	900	2200	890	3900		
	900	2300	890	4000		
	900	2400	890	4000		
	1000	2100	990	4100		
	1000	2200	990	4100		
	1000	2300	990	4200		
	1000	2400	990	4200		
	1100	2100	1090	4300		
	1100	2200	1090	4300		
	1100	2300	1090	4400		
	1100	2400	1090	4400		
	1200	2100	1180	4400		
	1200	2200	1180	4400		
	1200	2300	1180	4500		
	1200	2400	1180	4500		

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 38 из 43

Таблица А.5 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии, мм	Размеры ручек (k × m), мм	Высота по- верхности для ручек n, мм
Мешок патологоанатомиче- ский из полиэтилена ПВД 200 мкм, на молнии типа «С», с ручками «Евростан- дарт»	900	2100	990	3900	30×100	150
	900	2200	990	3900		
	900	2300	990	4000		
	900	2400	990	4000		
	1000	2100	1090	4100		
	1000	2200	1090	4100		
	1000	2300	1090	4200		
	1000	2400	1090	4200		
	1100	2100	1200	4300		
	1100	2200	1200	4300		
	1100	2300	1200	4400		
	1100	2400	1200	4400		
	1200	2100	1310	4400		
	1200	2200	1310	4400		
	1200	2300	1310	4500		
	1200	2400	1310	4500		
Мешок патологоанатомиче- ский из полиэтилена ПВД 210 мкм, на молнии типа «С», с ручками «Евростан- дарт»	900	2100	1030	3900	30×100	150
	900	2200	1030	3900		
	900	2300	1030	4000		
	900	2400	1030	4000		
	1000	2100	1150	4100		
	1000	2200	1150	4100		
	1000	2300	1150	4200		
	1000	2400	1150	4200		
	1100	2100	1270	4300		
	1100	2200	1270	4300		
	1100	2300	1270	4400		
	1100	2400	1270	4400		
	1200	2100	1380	4400		
	1200	2200	1380	4400		
	1200	2300	1380	4500		
	1200	2400	1380	4500		

Примечание: Края мешка сложены в 3 слоя и в них пропаяны ручки, количество ко-
торых кратно 4.

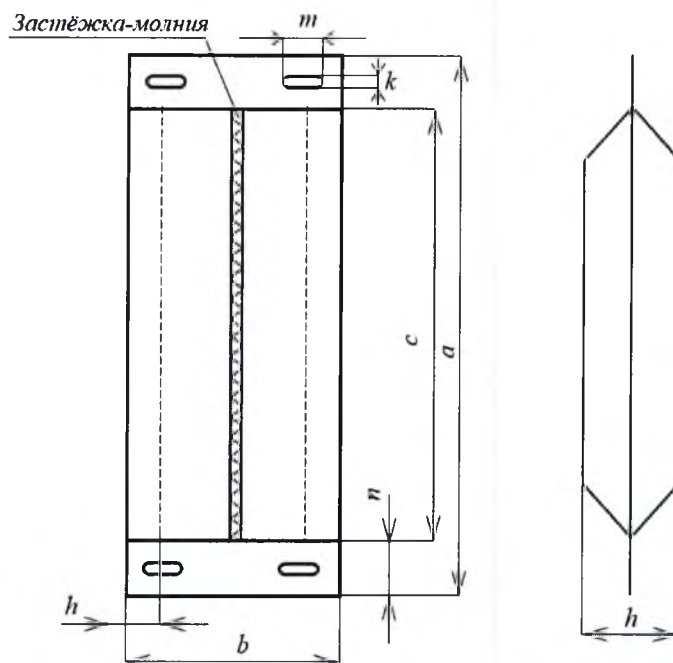


Рисунок А.6 - Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»

Таблица А.6 - Массогабаритные параметры. Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии с, мм	Размеры ручек (k × m), мм	Размер боково- го фаль- ца, мм	Высота по- верхности для ручек n, мм
Мешок патолого- анатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, с боковы- ми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»	700	2100	820	1800	30×100	150	150
	700	2200	820	1900			
	700	2300	820	2000			
	700	2400	820	2100			
	800	2100	900	1800			
	800	2200	900	1900			
	800	2300	900	2000			
	800	2400	900	2100			
Мешок патолого- анатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, с боковы- ми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»	700	2100	930	1800	30×100	150	150
	700	2200	930	1900			
	700	2300	930	2000			
	700	2400	930	2100			
	800	2100	1030	1800			
	800	2200	1030	1900			
	800	2300	1030	2000			
	800	2400	1030	2100			

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 40 из 43

Таблица А.6 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии с, мм	Размеры ручек (k × m), мм	Размер боково- го фаль- ца, мм	Высота по- верхности для ручек п, мм
Мешок патолого-анатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»	700	2100	990	1800	30×100	150	150
	700	2200	990	1900			
	700	2300	990	2000			
	700	2400	990	2100			
	800	2100	1090	1800			
	800	2200	1090	1900			
	800	2300	1090	2000			
	800	2400	1090	2100			
Мешок патолого-анатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»	700	2100	1090	1800	30×100	150	150
	700	2200	1090	1900			
	700	2300	1090	2000			
	700	2400	1090	2100			
	800	2100	1200	1800			
	800	2200	1200	1900			
	800	2300	1200	2000			
	800	2400	1200	2100			
Мешок патолого-анатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, с боковыми фальцами, на молнии, с ручками «Евростандарт»	700	2100	1150	1800	30×100	150	150
	700	2200	1150	1900			
	700	2300	1150	2000			
	700	2400	1150	2100			
	800	2100	1270	1800			
	800	2200	1270	1900			
	800	2300	1270	2000			
	800	2400	1270	2100			

Примечание: Края мешка сложены в 3 слоя и в них пропаяны ручки, количество которых кратно 4.

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 41 из 43

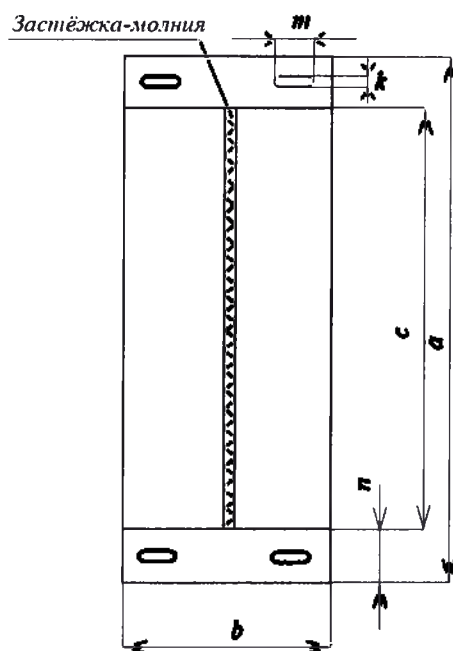


Рисунок А.7 - Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»

Таблица А.7 - Массогабаритные параметры. Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии c, мм	Размеры ручек (k × m), мм	Высота поверхности для ручек n, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 150 мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»	900	2100	740	1800	30×100	150
	900	2200	740	1900		
	900	2300	740	2000		
	900	2400	740	2100		
	1000	2100	820	1800		
	1000	2200	820	1900		
	1000	2300	820	2000		
	1000	2400	820	2100		
	1100	2100	900	1800		
	1100	2200	900	1900		
	1100	2300	900	2000		
	1100	2400	900	2100		
	1200	2100	990	1800		
	1200	2200	990	1900		
	1200	2300	990	2000		
	1200	2400	990	2100		

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 42 из 43

Таблица А.7 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии с, мм	Размеры ручек (k × m), мм	Высота поверхности для ручек п, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 170 мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»	900	2100	840	1800	30×100	150
	900	2200	840	1900		
	900	2300	840	2000		
	900	2400	840	2100		
	1000	2100	930	1800		
	1000	2200	930	1900		
	1000	2300	930	2000		
	1000	2400	930	2100		
	1100	2100	1030	1800		
	1100	2200	1030	1900		
	1100	2300	1030	2000		
	1100	2400	1030	2100		
	1200	2100	1120	1800		
	1200	2200	1120	1900		
	1200	2300	1120	2000		
	1200	2400	1120	2100		
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 180 мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»	900	2100	890	1800	30×100	150
	900	2200	890	1900		
	900	2300	890	2000		
	900	2400	890	2100		
	1000	2100	990	1800		
	1000	2200	990	1900		
	1000	2300	990	2000		
	1000	2400	990	2100		
	1100	2100	1090	1800		
	1100	2200	1090	1900		
	1100	2300	1090	2000		
	1100	2400	1090	2100		
	1200	2100	1180	1800		
	1200	2200	1180	1900		
	1200	2300	1180	2000		
	1200	2400	1180	2100		

ООО «ВЕДСЛАВА» Россия, 443106, Самарская область, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 516, кв. 50 Тел.: 8 (846) 221-64-56 E-mail: ved.slava@mail.ru	Документ: ВЕДС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 43 из 43

Таблица А.7 (продолжение)

Наименование	Ширина b, мм	Длина a, мм	Масса, г	Длина молнии с, мм	Размеры ручек (k × m), мм	Высота поверхно- сти для ручек п, мм
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 200 мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»	900	2100	990	1800	30×100	150
	900	2200	990	1900		
	900	2300	990	2000		
	900	2400	990	2100		
	1000	2100	1090	1800		
	1000	2200	1090	1900		
	1000	2300	1090	2000		
	1000	2400	1090	2100		
	1100	2100	1200	1800		
	1100	2200	1200	1900		
	1100	2300	1200	2000		
	1100	2400	1200	2100		
	1200	2100	1310	1800		
	1200	2200	1310	1900		
	1200	2300	1310	2000		
	1200	2400	1310	2100		
Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД 210 мкм, на молнии, с ручками «Евростандарт»	900	2100	1030	1800	30×100	150
	900	2200	1030	1900		
	900	2300	1030	2000		
	900	2400	1030	2100		
	1000	2100	1150	1800		
	1000	2200	1150	1900		
	1000	2300	1150	2000		
	1000	2400	1150	2100		
	1100	2100	1270	1800		
	1100	2200	1270	1900		
	1100	2300	1270	2000		
	1100	2400	1270	2100		
	1200	2100	1380	1800		
	1200	2200	1380	1900		
	1200	2300	1380	2000		
	1200	2400	1380	2100		

Примечание: Края мешка сложены в 3 слоя и в них пропаяны ручки, количество которых кратно 4.

протокол, пронумеровано, скреплено
печатью _____ лист(ов)
Директор
ООО «ВЕЛЕС-ЛАВА»
Морзункова О.С.
« 11 » _____ 2018 г.

