

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Д-Медфарм»

Резник О. Д.



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Укладки противоэпидемические медицинские УК-5
по ТУ 9398-005-45508262-2010***

Производства


Общество с ограниченной

ответственностью «Д-Медфарм»


Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.

Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

Укладка противоэпидемическая медицинская универсальная УК-5Б (общий вид упаковки)

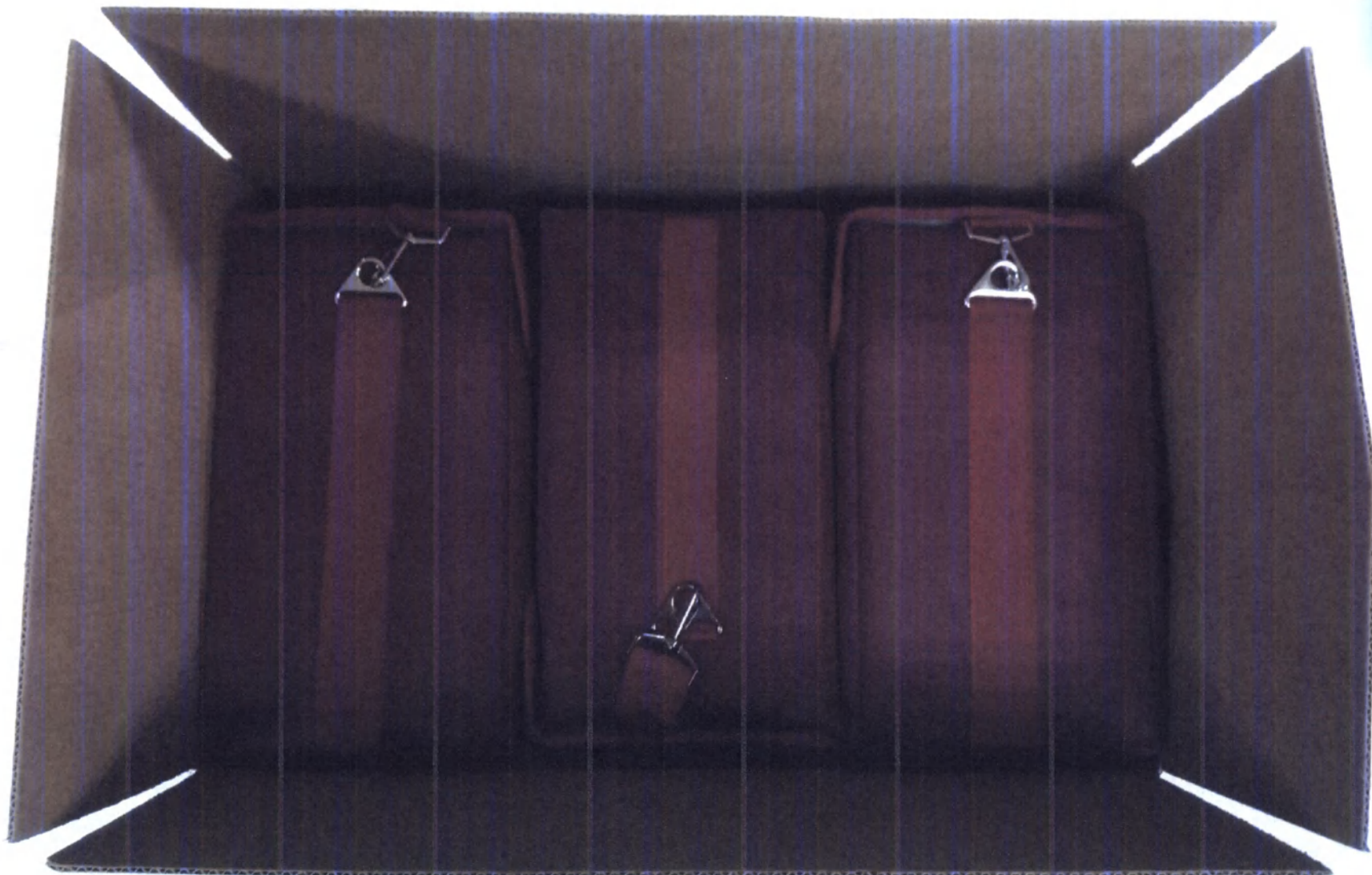

Укладка противозидемическая медицинская универсальная УК-5Б (общий вид упаковки)

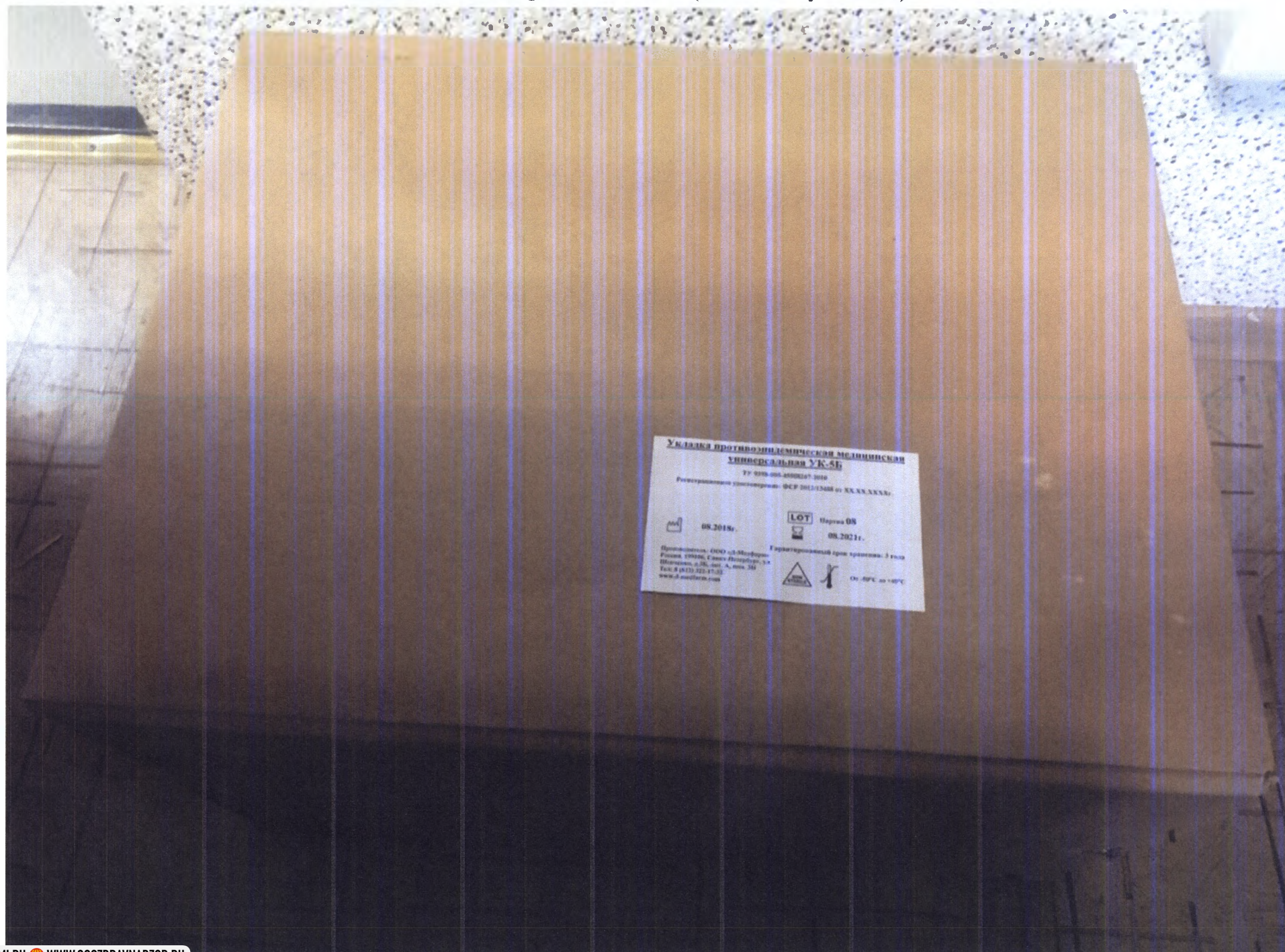

Укладка противозидемическая медицинская
универсальная УК-5Б
ТУ 9339-008-2000207-1010
Регистрационный сертификат - ФСР 2012/12408 от XX.XX.XXXX.
08.2018г. LOT Серия 08
08.2021г.
Гарантированный срок хранения: 3 года
Хранить при температуре от -10°C до +25°C
Производитель: ООО «А.Медфарм»
Россия, 199390, Санкт-Петербург, 3-я
Набережная, д.36, лит. А, этаж 3А
Тел: 8 (812) 323-17-02
www.a.medfarm.com

Укладка противозидемическая медицинская универсальная УК-5Б

ТУ 9398-005-45508262-2010

Регистрационное удостоверение: ФСР 2012/13488 от XX.XX.XXXXг.

СУМКА № _____

LOT

Партия _____



XX.XX.XX.XX.XXг.



XX.XX.XX.XX.XXг.

Гарантированный срок хранения: 3 года

Производитель: ООО «Д-Медфарм»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н
Тел: 8 (812) 322-17-32
www.d-medfarm.com



От -50°C до +40°C

Предметы для забора крови:
Вакуумная пробирка Na-цитрат 3,8%, 4 мл.



Вакуумная пробирка К2 или К3 ЭДТА, 4 мл.




Вакуумная пробирка К2 или К3 ЭДТА, 4 мл.



Игла для забора проб крови




Держатель механический для вакуумных систем

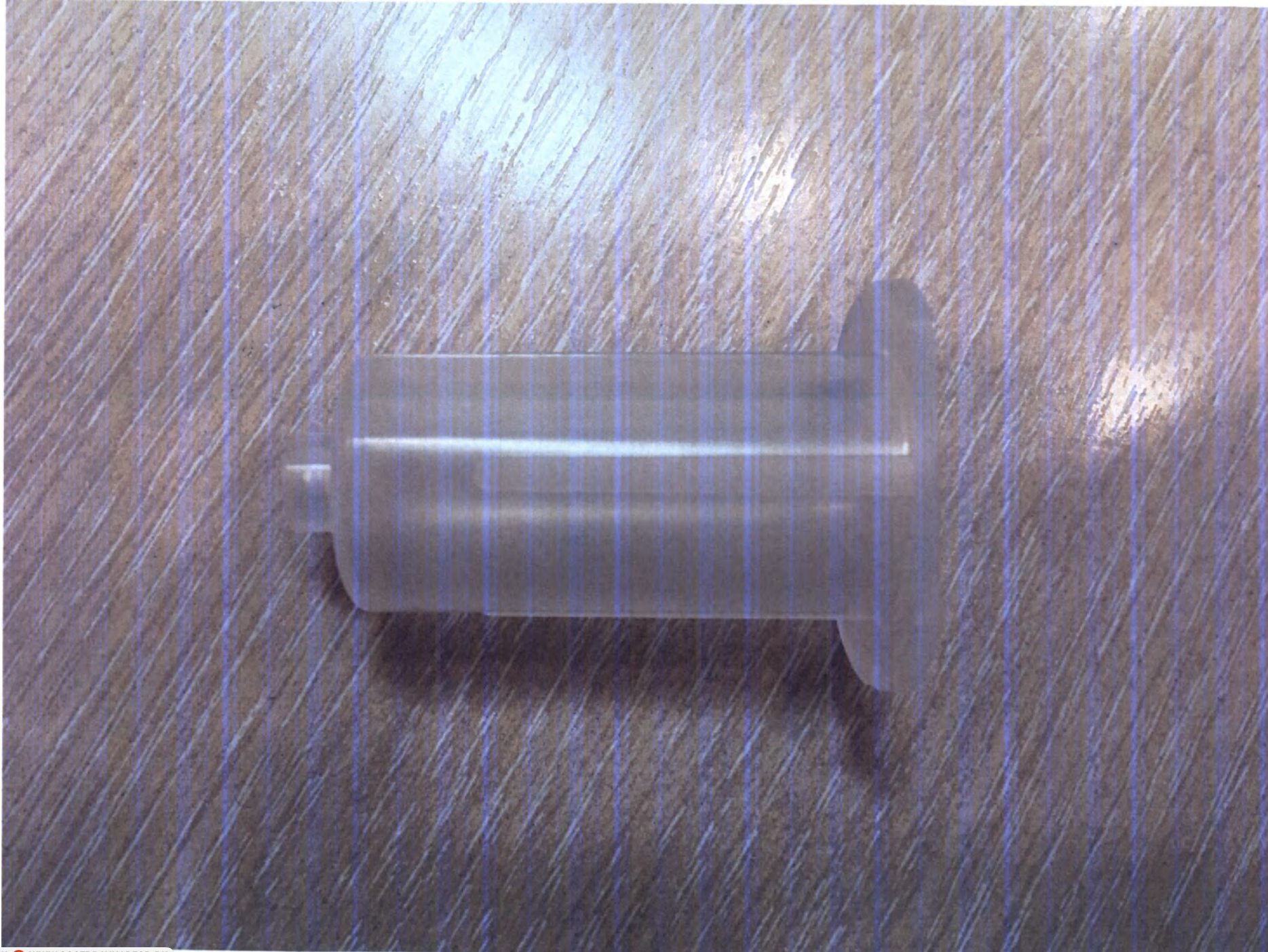


Скарификатор-копье, однократного применения, стерильное




Салфетка медицинская проспиртованная

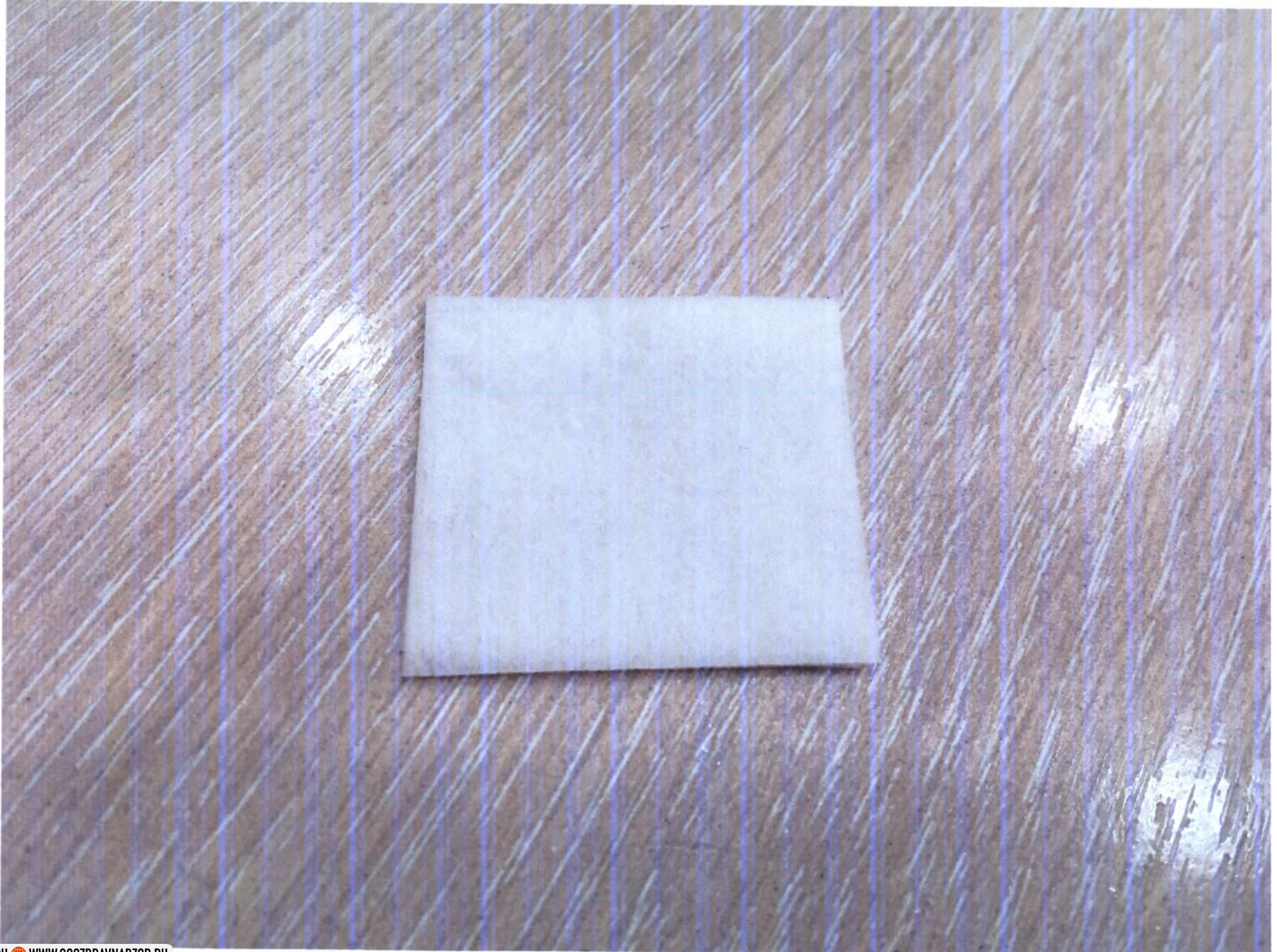

Жгут кровоостанавливающий

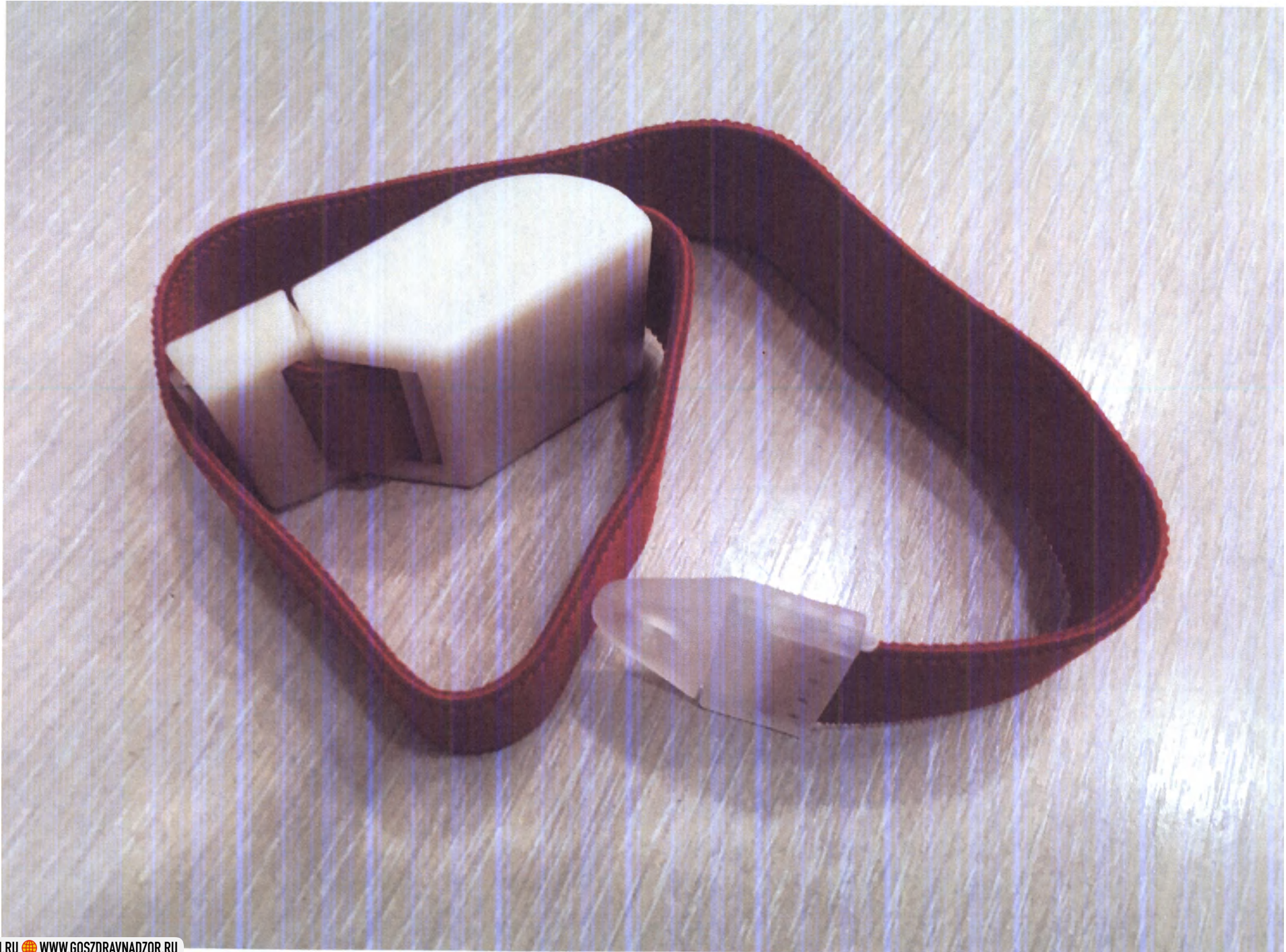

Бинт медицинский марлевый стерильный

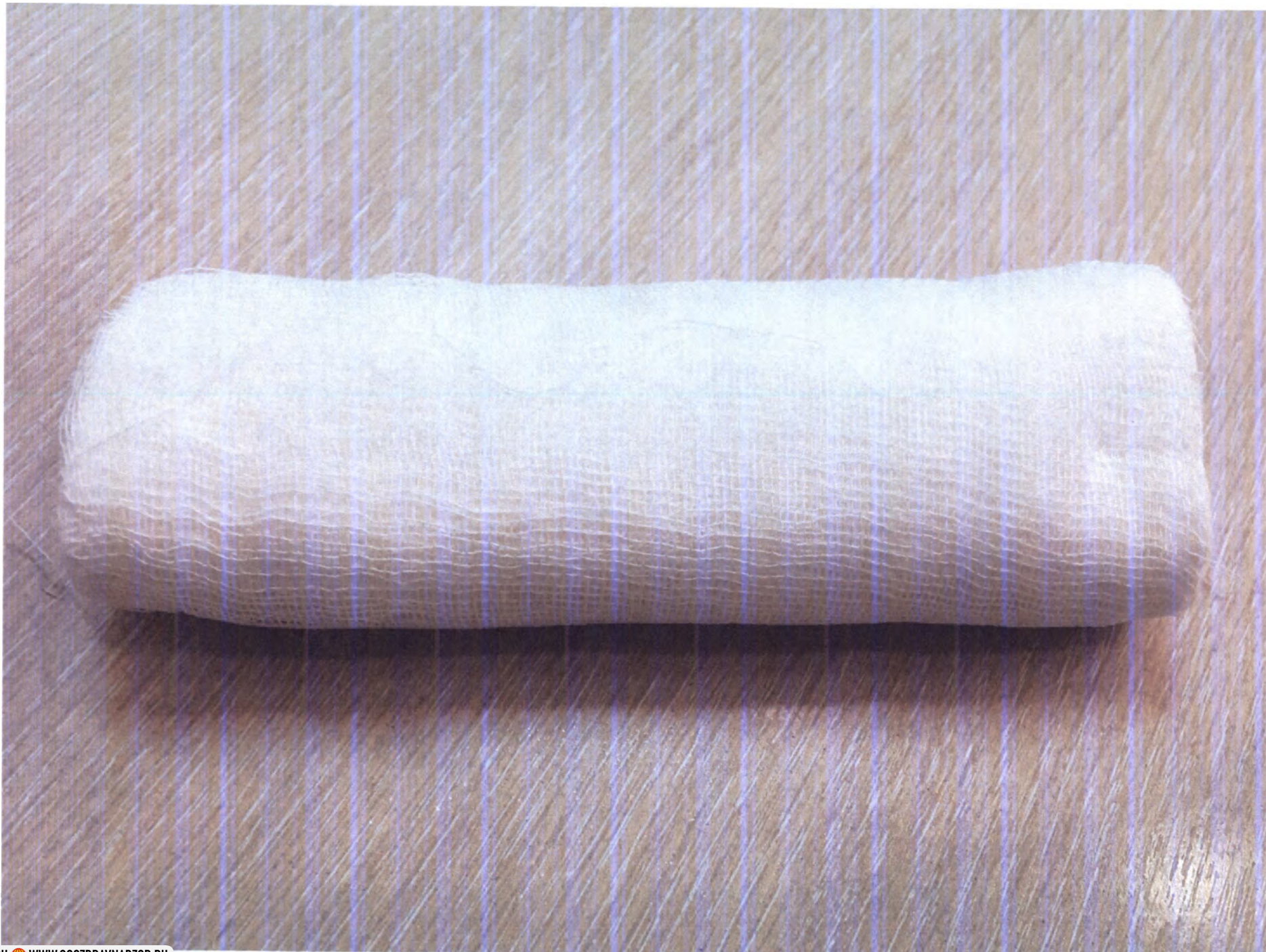


Салфетка марлевая медицинская, стерильная



Лейкопластырь




Шприц инъекционный с иглой (до 20 мл) медицинский одноразового применения, стерильный

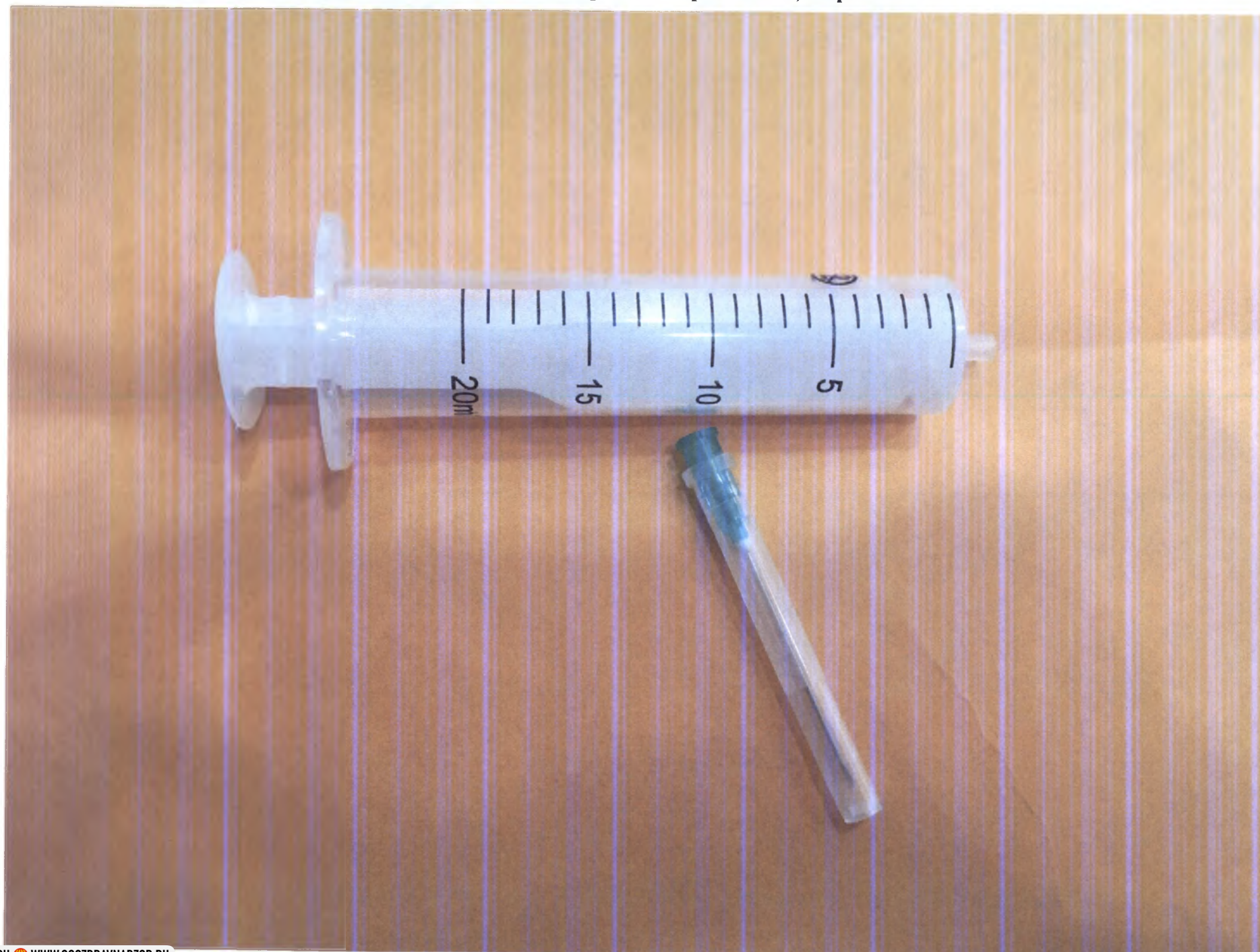


Предметы для забора биологического материала:


Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб (дерево/хлопок, стерильный, дл. 15см.)

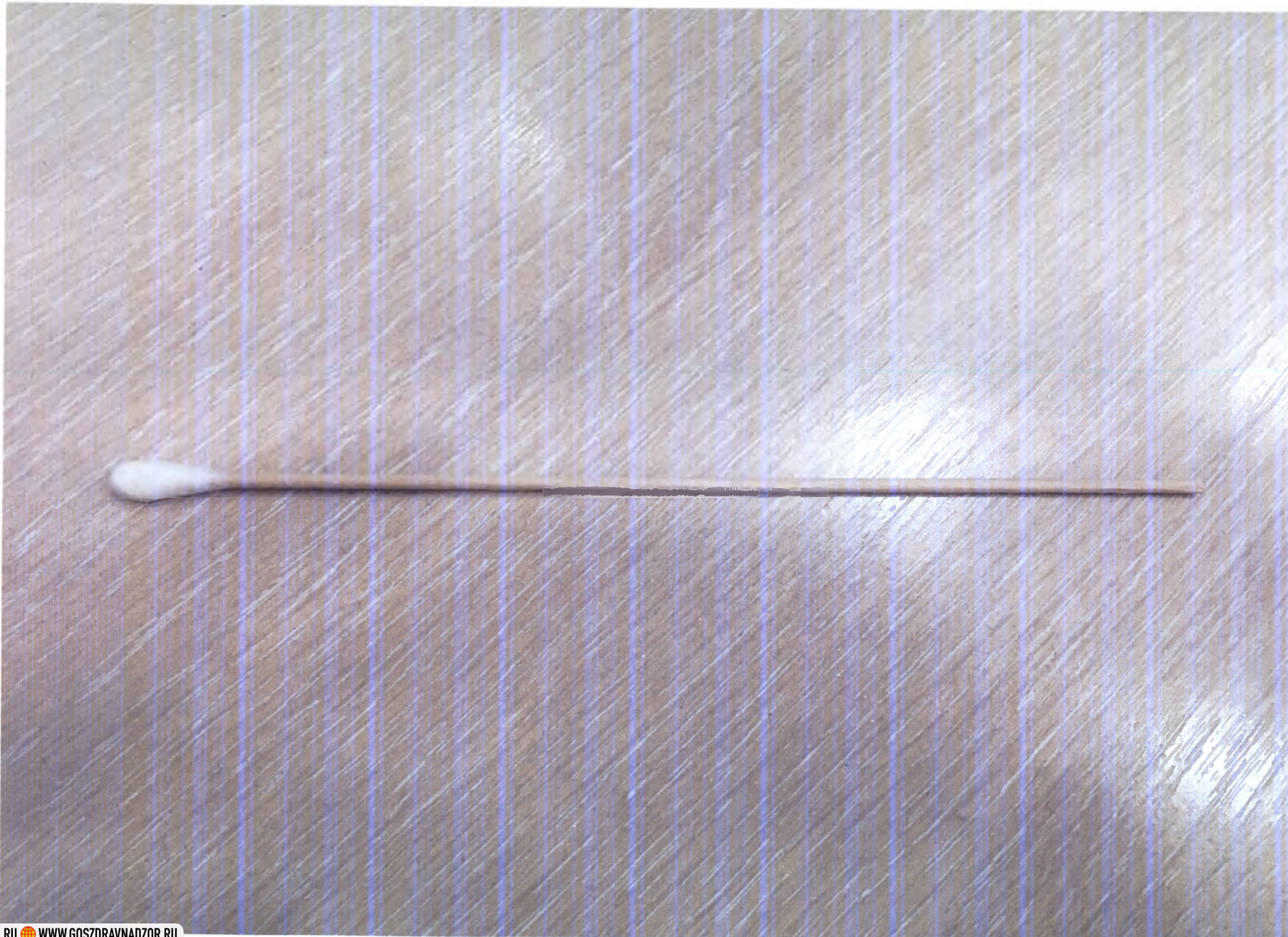

Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб, в комплекте с пустой пробиркой (дерево/хлопок, стерильный)

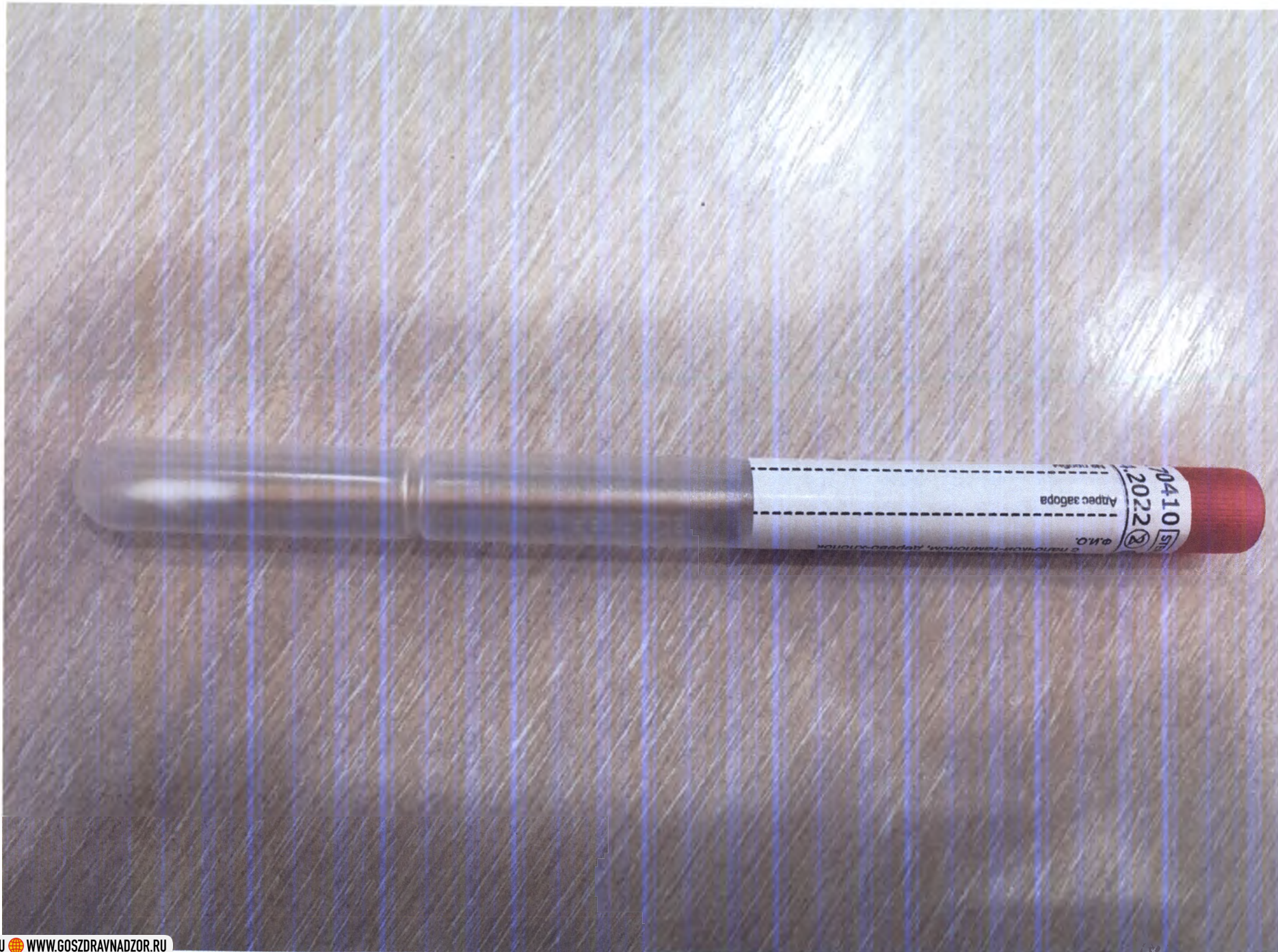


Пинцет (не менее 150 мм) одноразового применения, стерильный

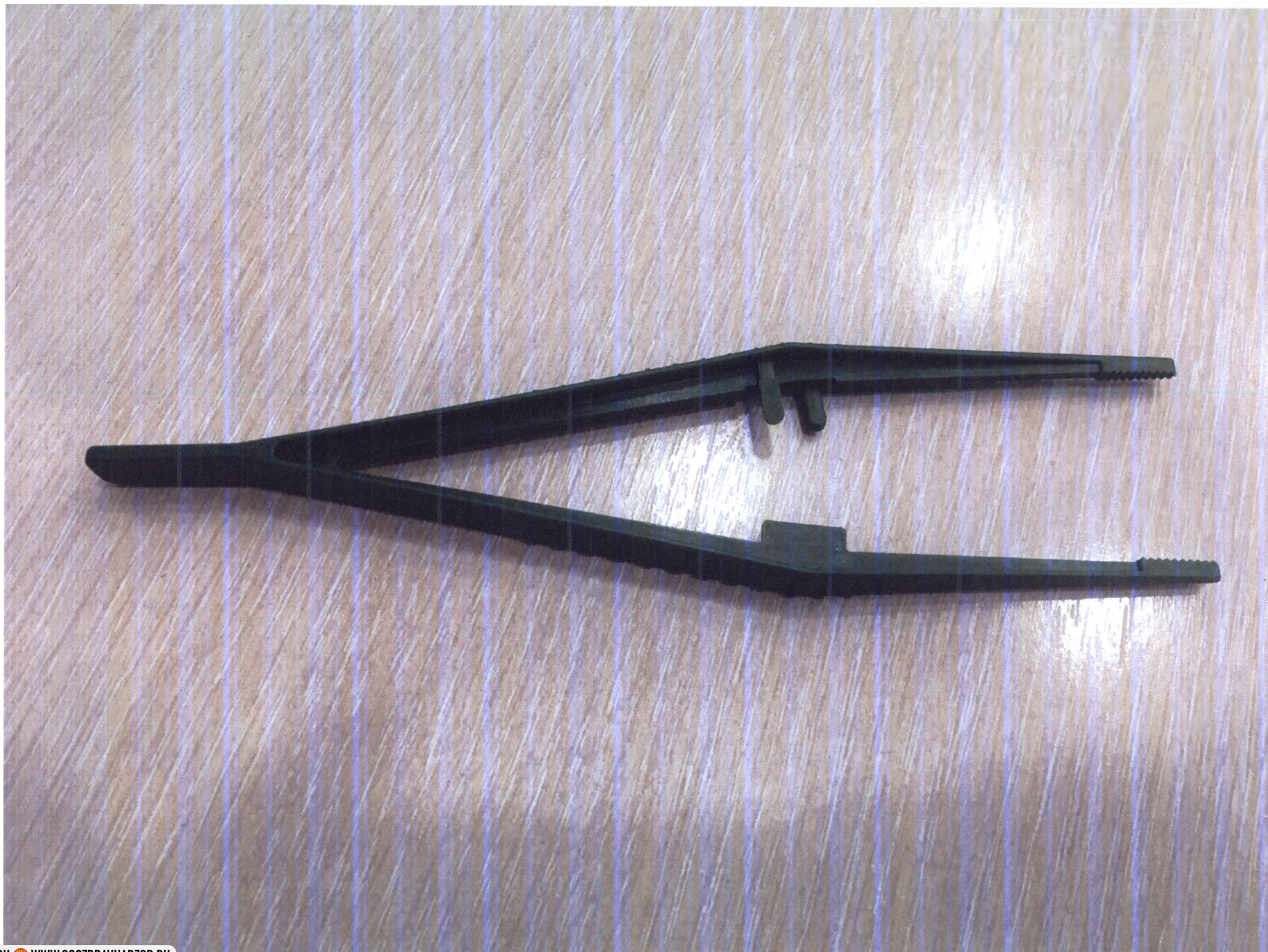


Шпатель медицинский деревянный, одноразовый, стерильный




Катетер урологический женский для одноразового использования, стерильный

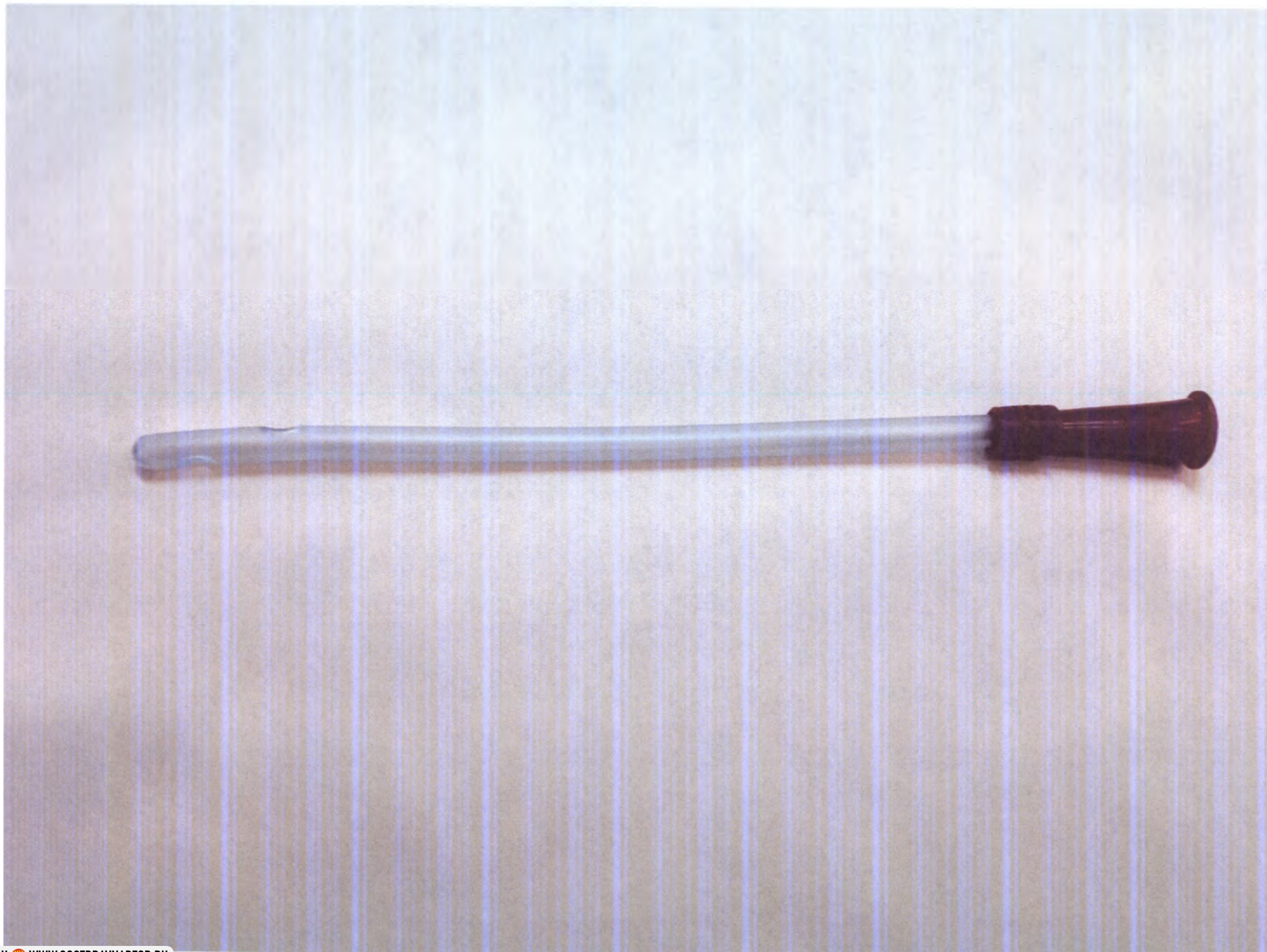


Катетер урологический мужской для одноразового использования, стерильный

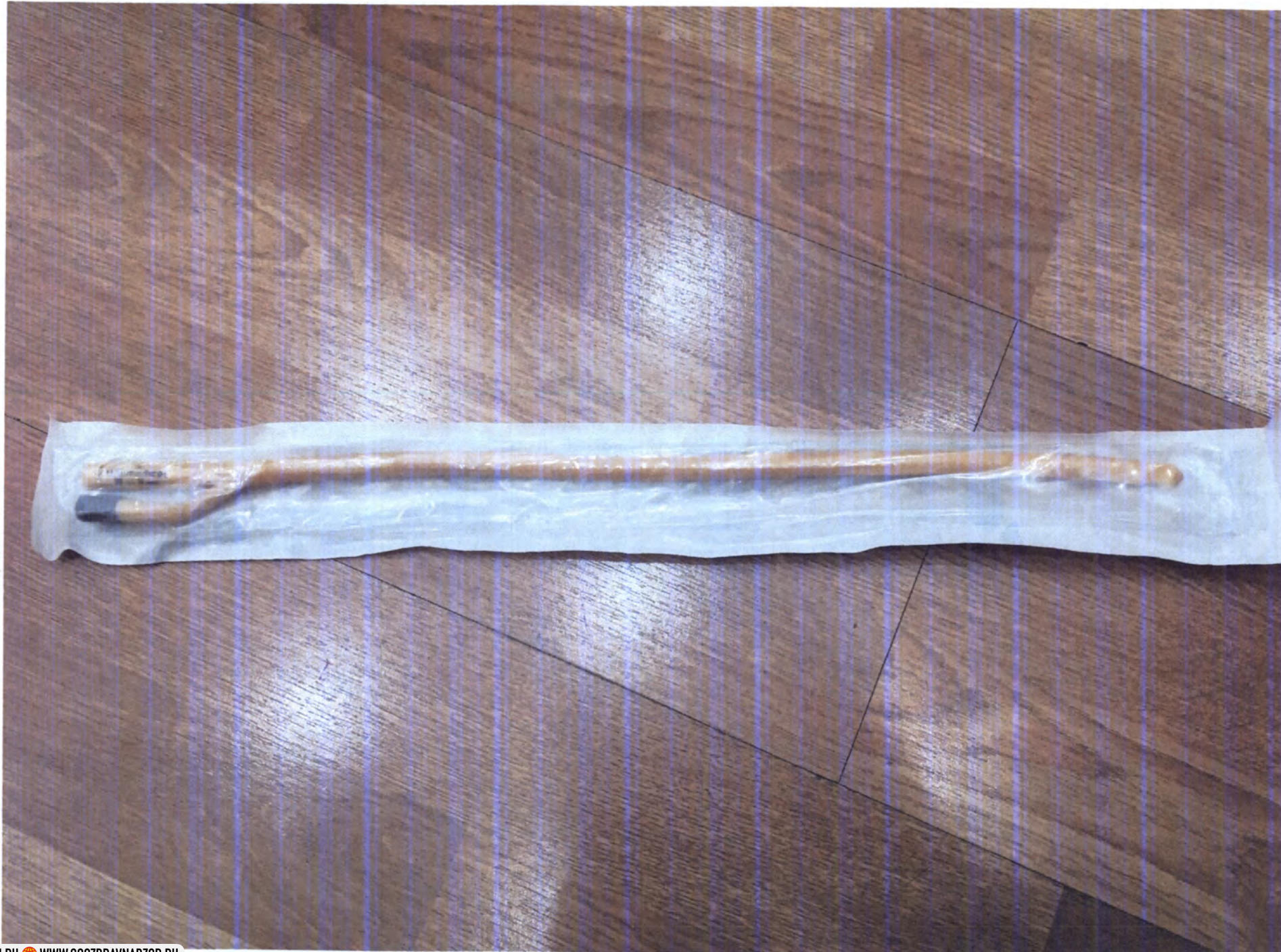


Вата медицинская гигроскопическая

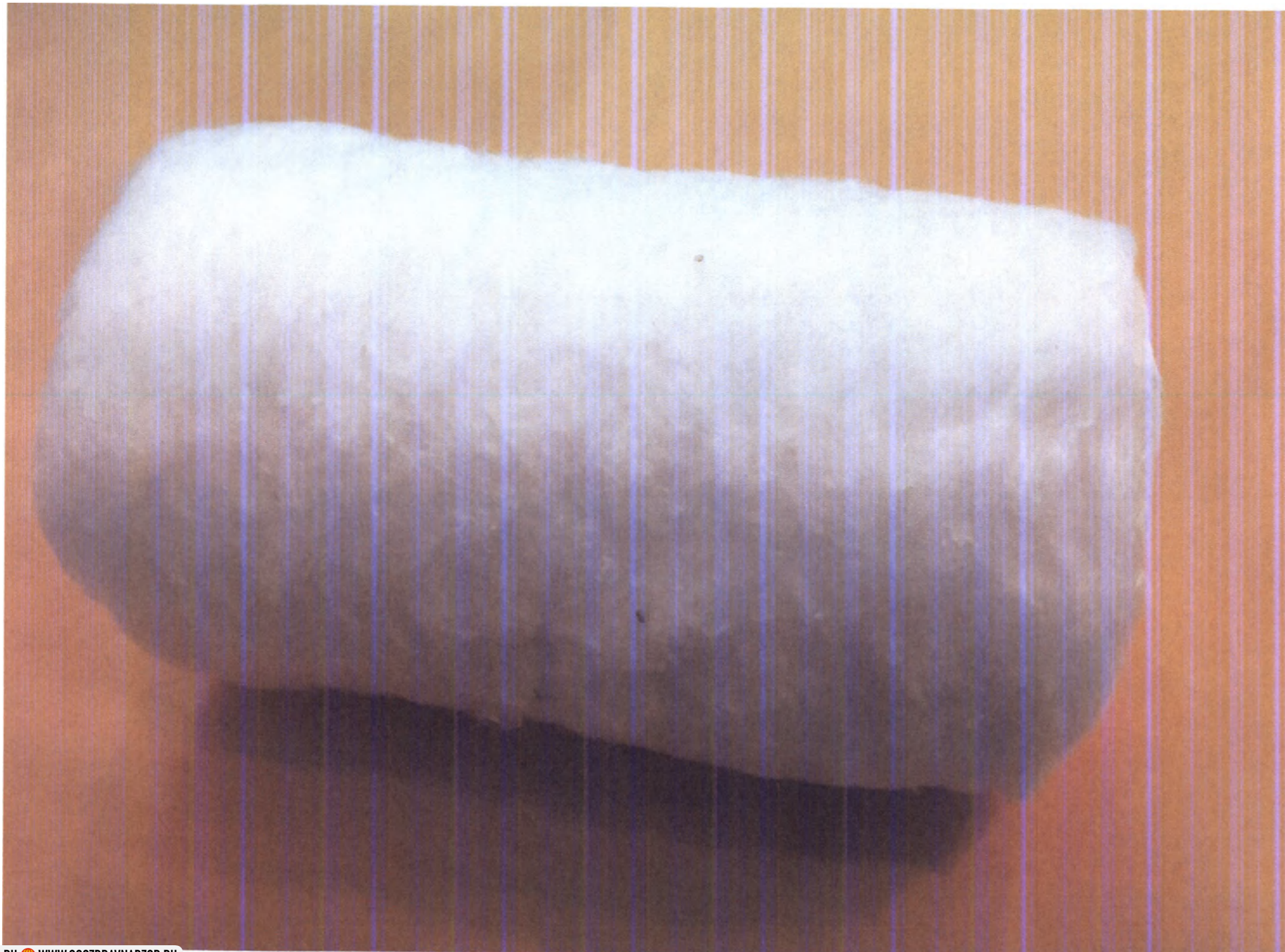


Предметы для забора, хранения и транспортировки проб биологического материала
Контейнер полипропиленовый с завинчивающейся крышкой, стерильный емкостью не менее 100 мл.

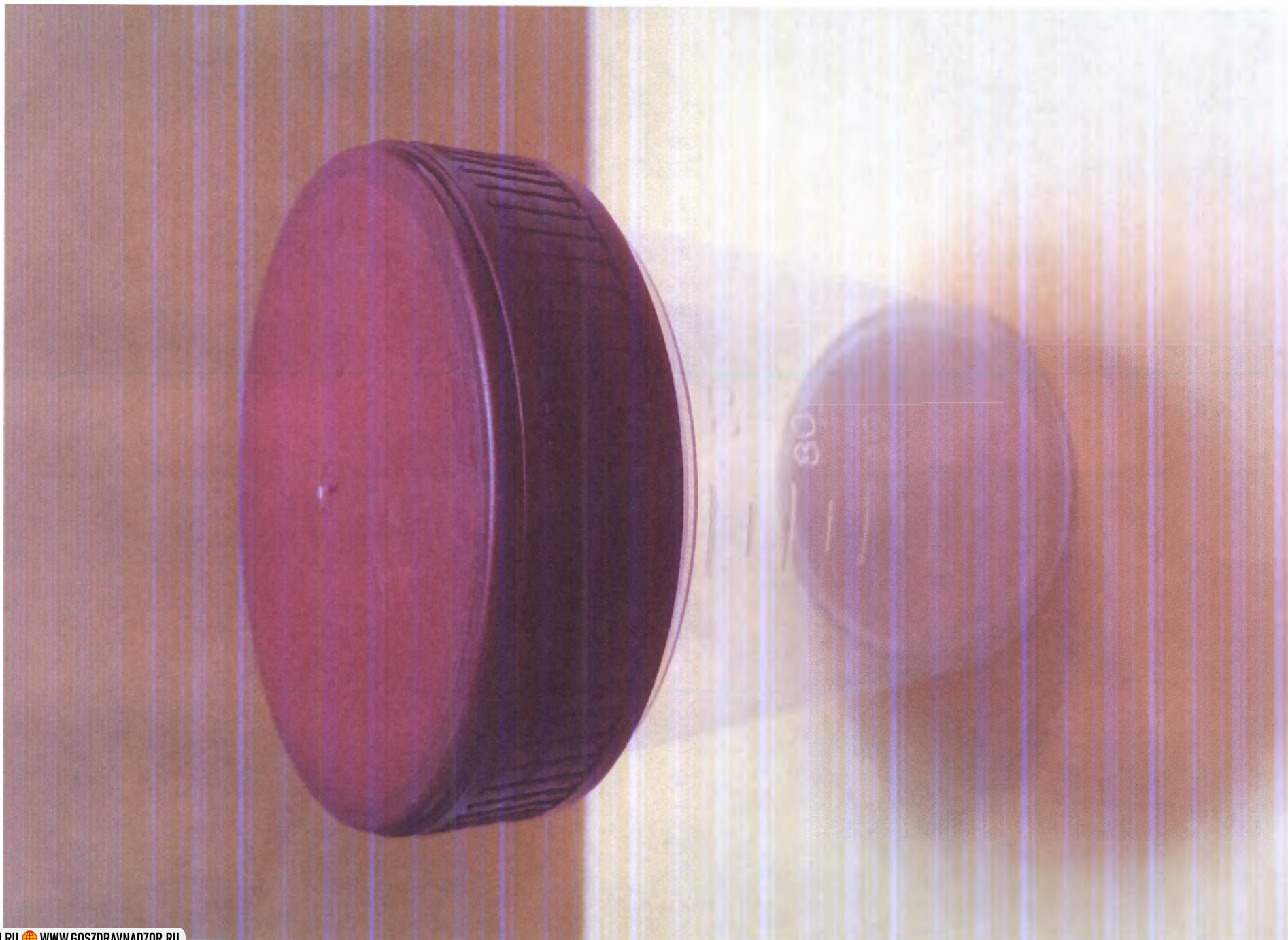


Контейнер лабораторный для проб с завинчивающейся крышкой, стерильный, емкостью не менее 50 мл.

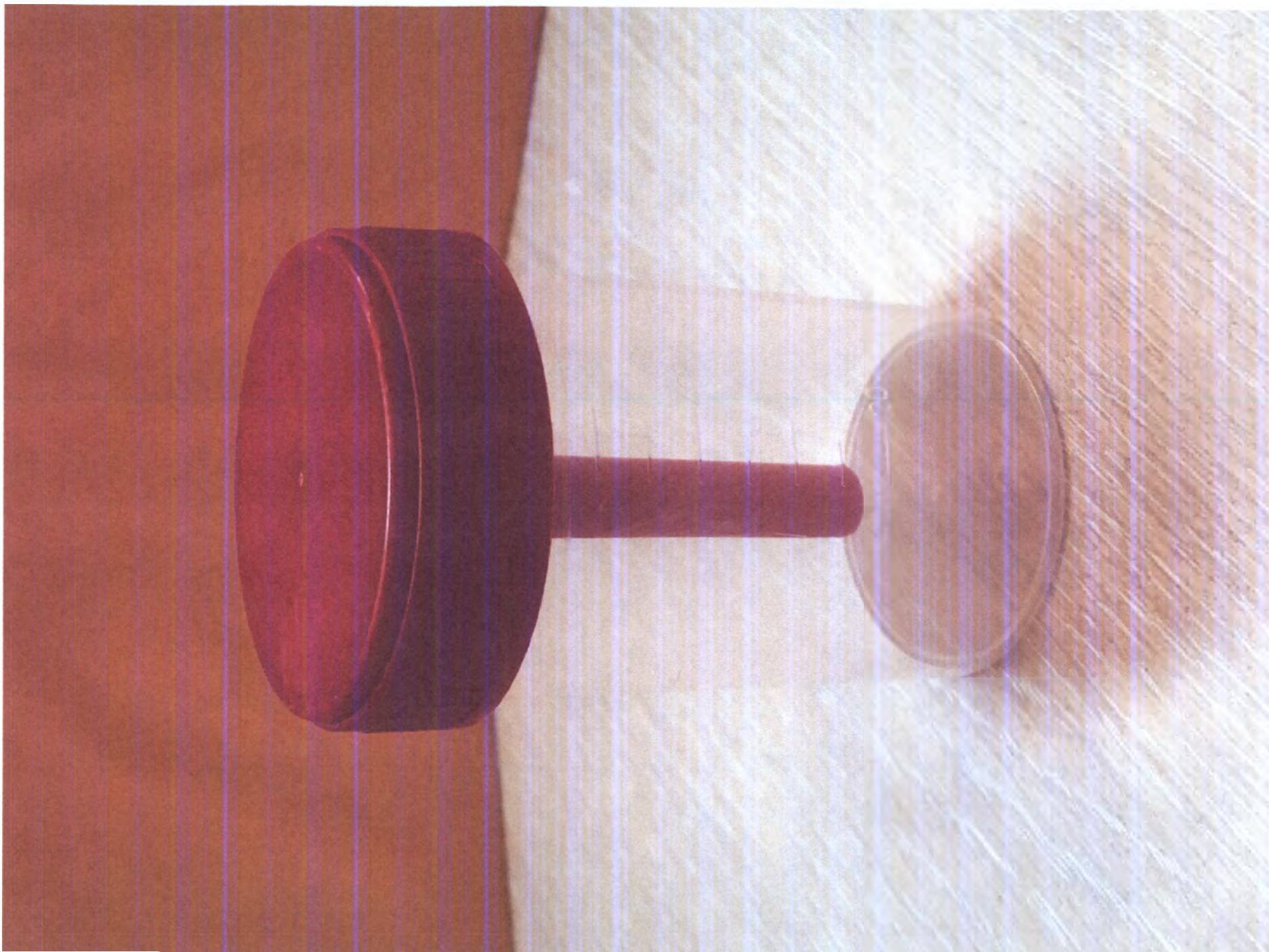

Контейнер лабораторный для проб с завинчивающейся крышкой, стерильный, 60 мл

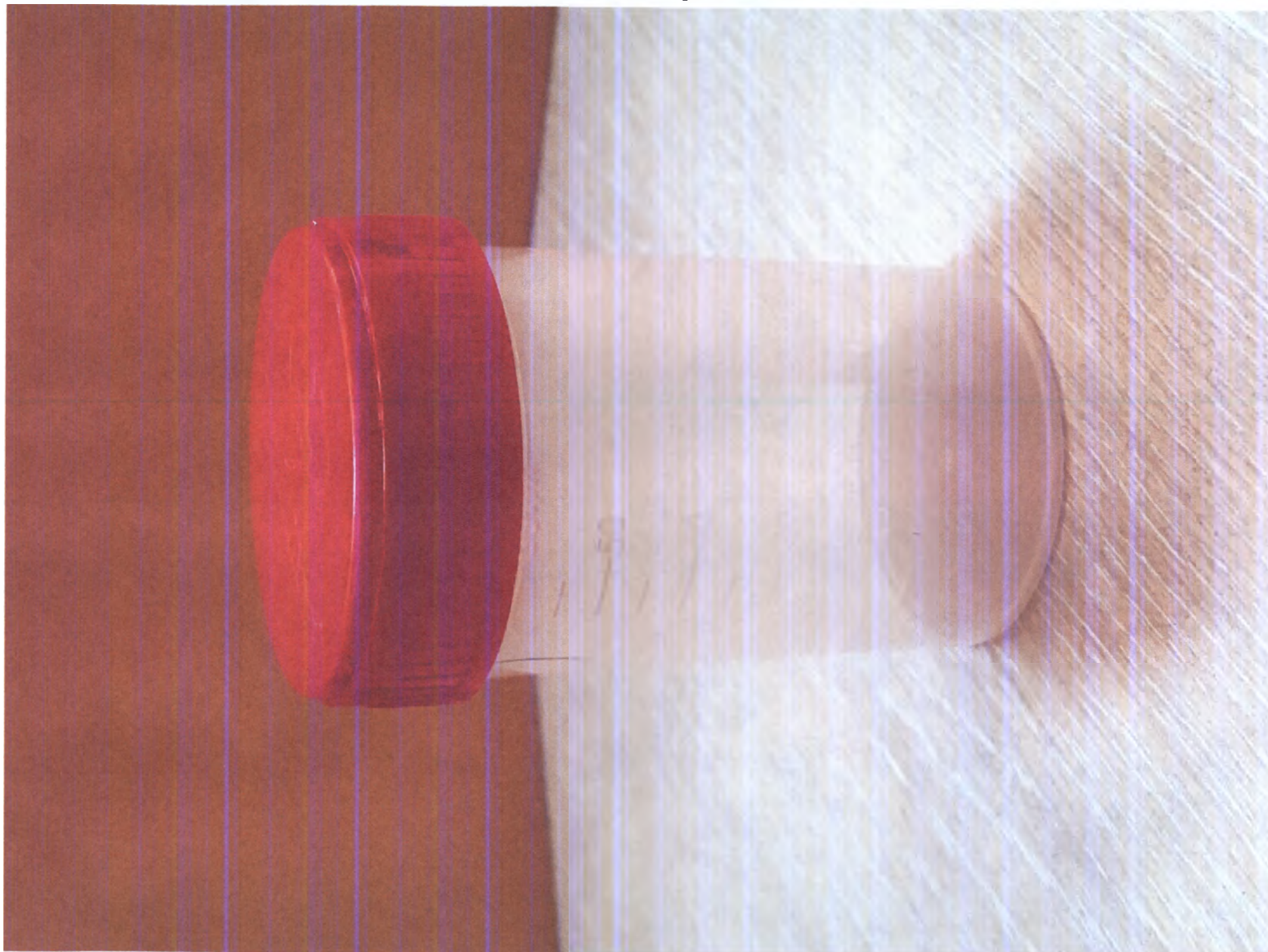


Пробирка микроцентрифужная 1,5 мл. типа «Эппендорф», нестерильная

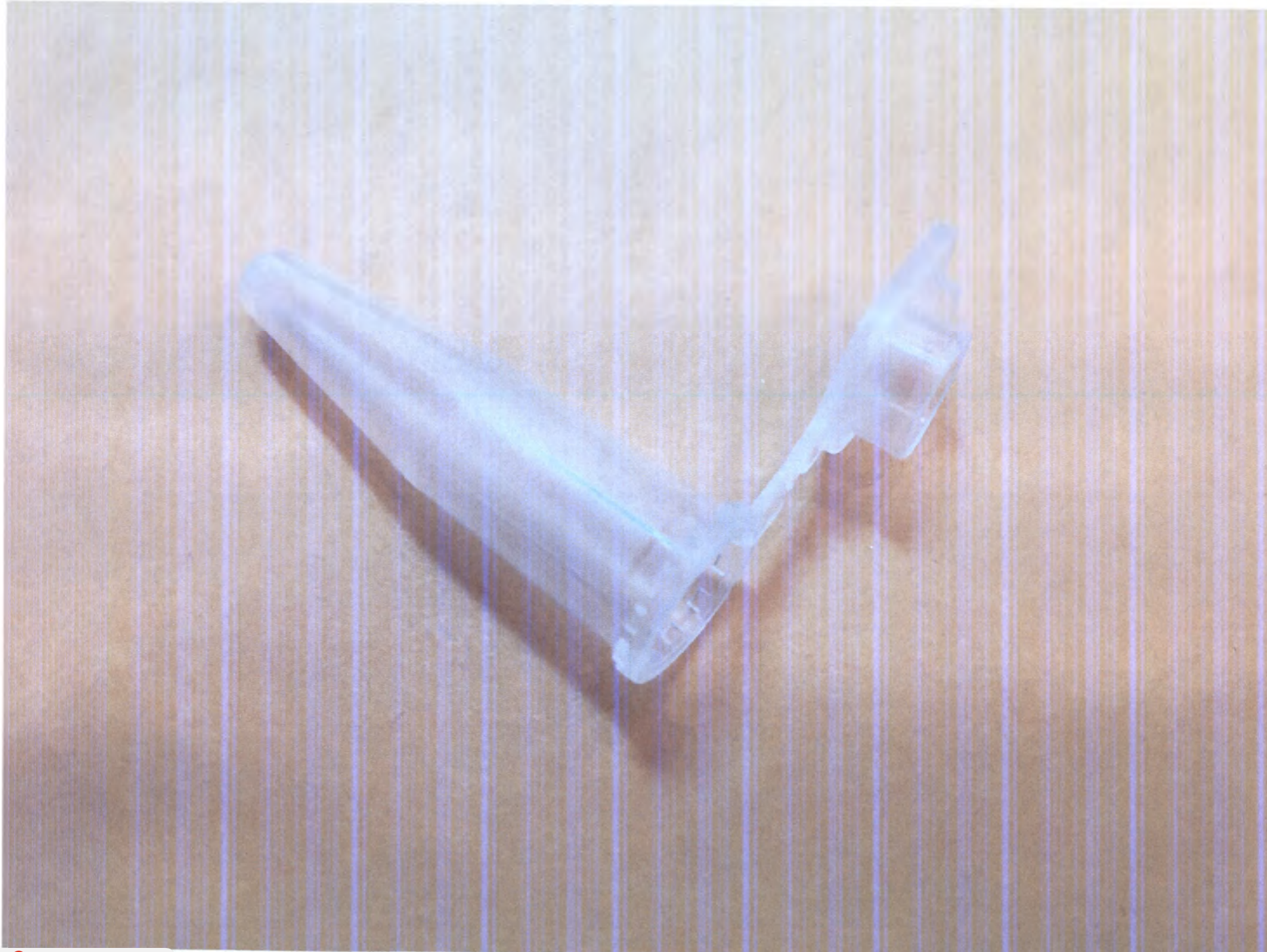


Криопробирка с давлением, завинчивающейся крышкой и юбкой устойчивости, стерильная 2,0 мл




Крафт-пакеты самоклеящиеся с индикатором для стерилизации, нестерильные

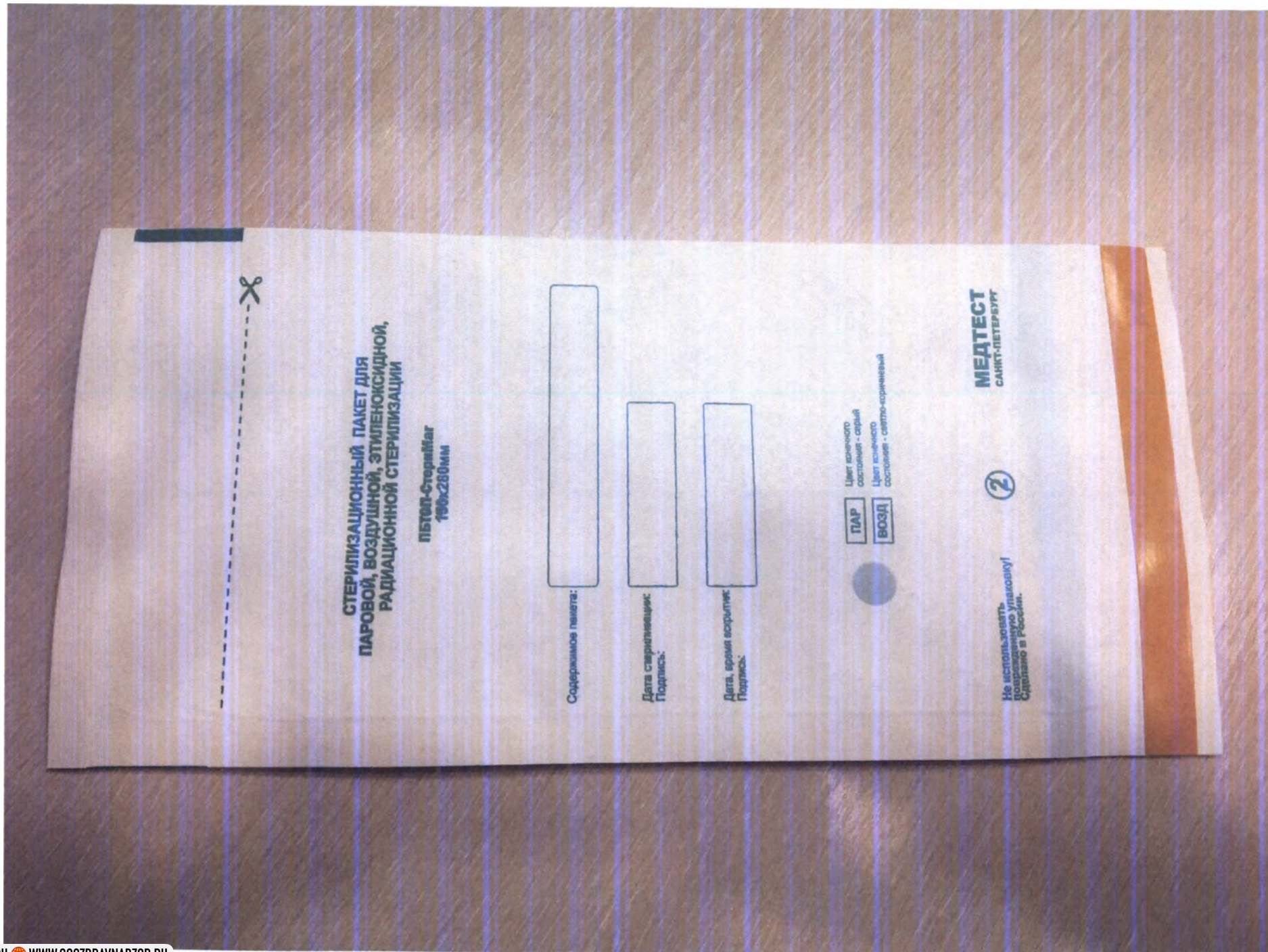

Пакет для автоклавирования (Крафт-пакет) на 3 л

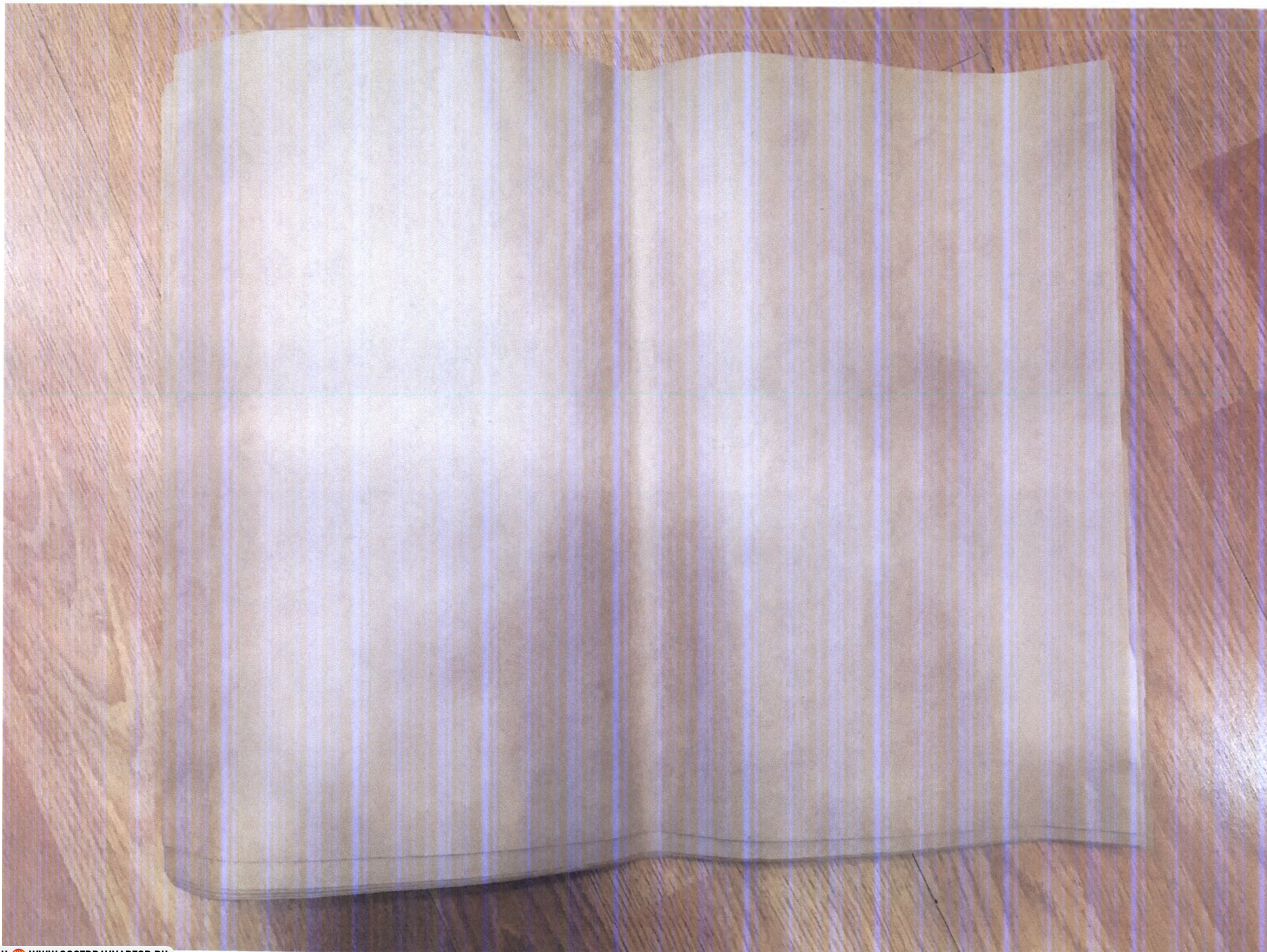


Полимерный пакет "Вихрь" для отбора проб и хранения образцов, стерильный

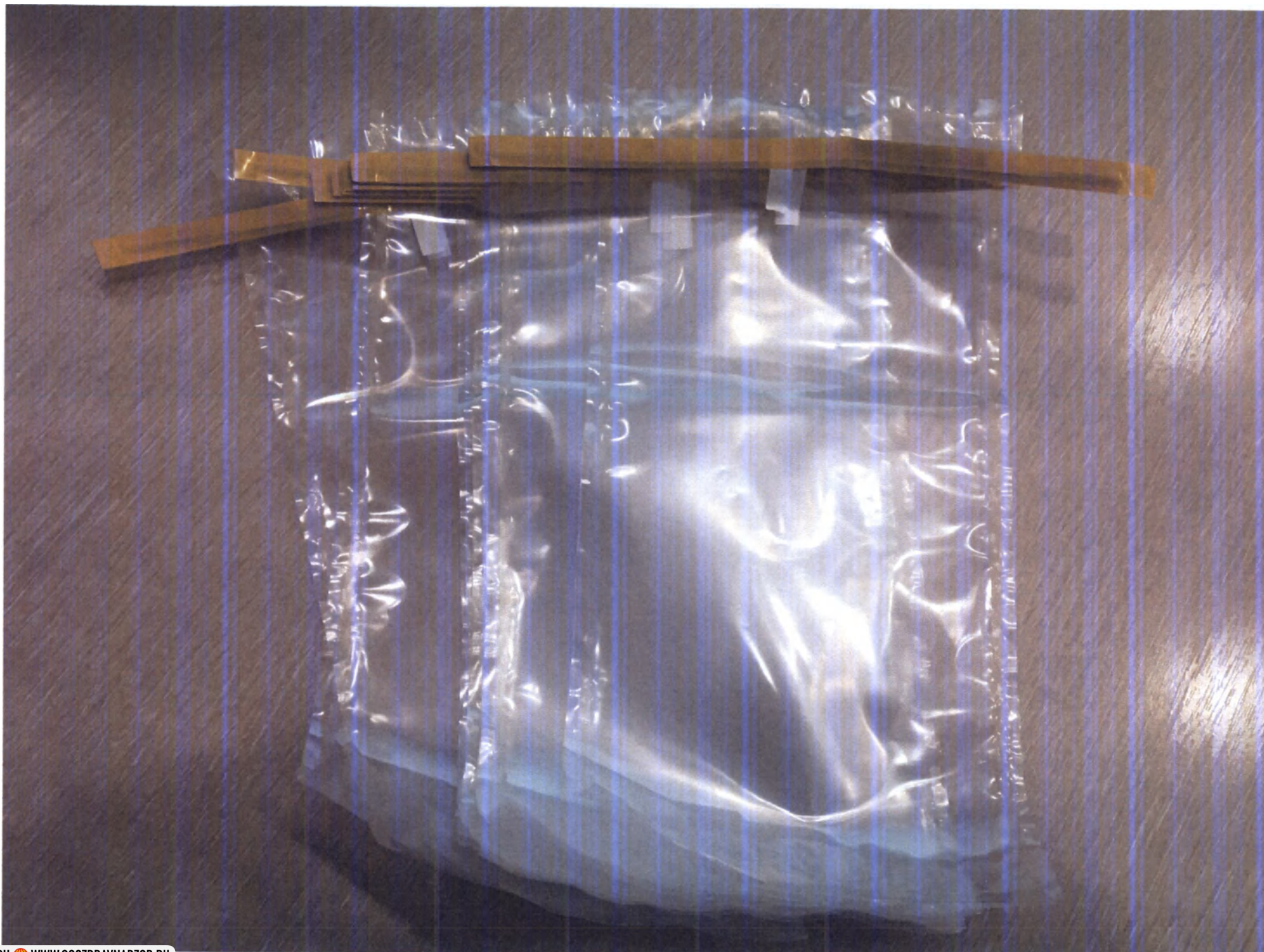

Медицинские ватные шарики, нестерильные




Контейнер для утилизации отходов и игл

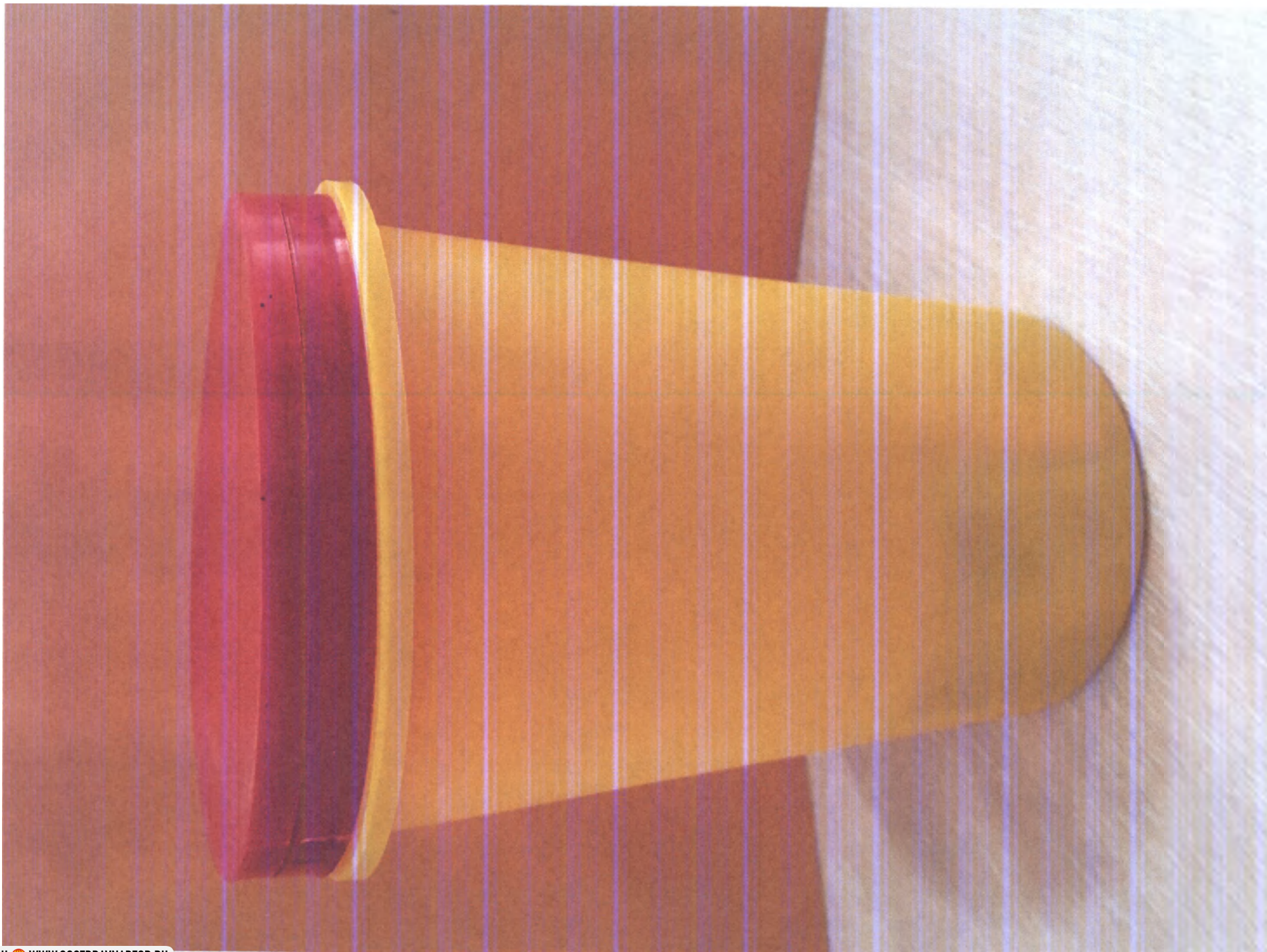


Бутылка цилиндрическая с завинчивающейся крышкой, неградуированная, 250 мл




Пинцет анатомический не менее 250 мм.

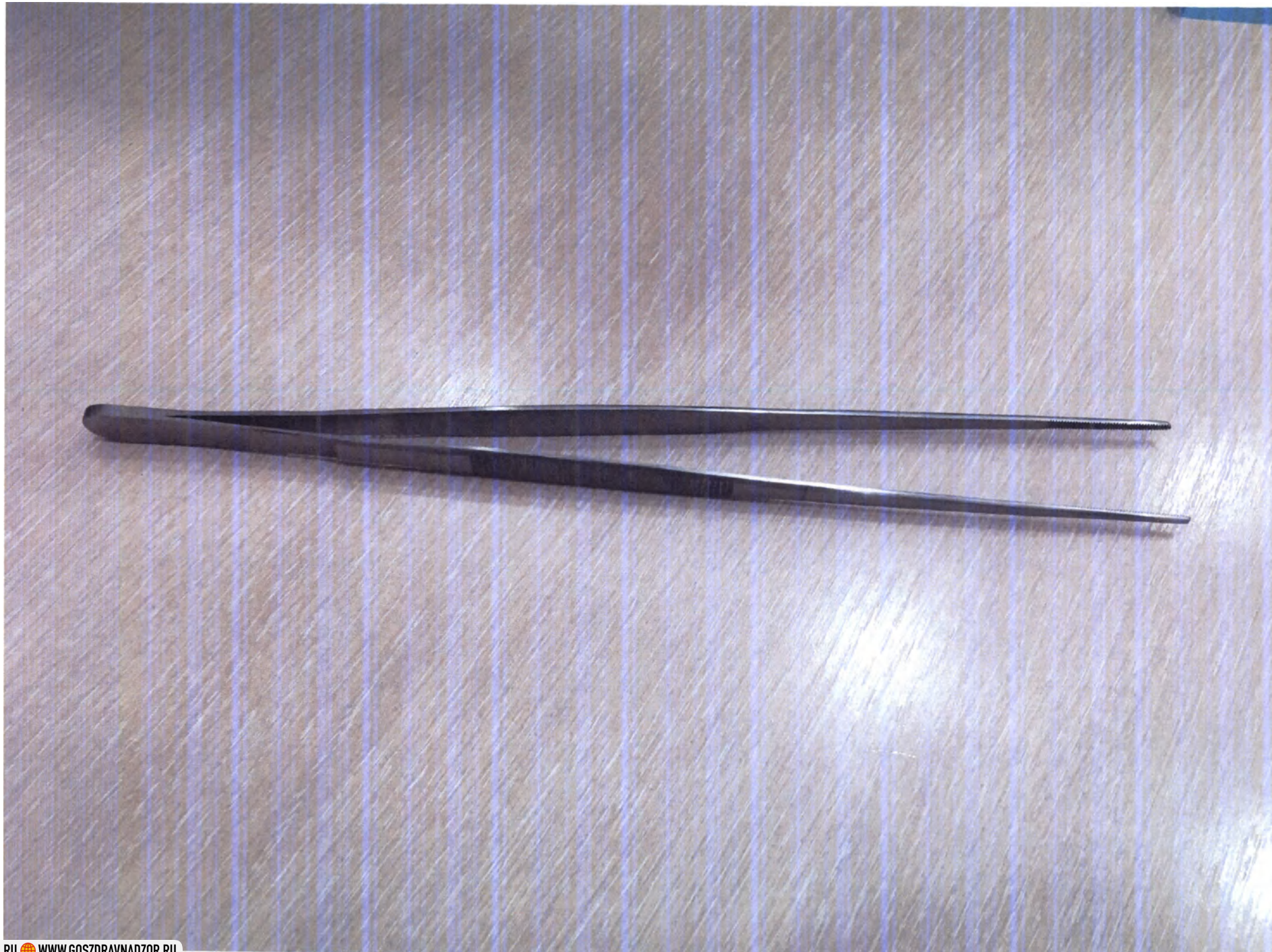

Пинцет хирургический не менее 140 мм.

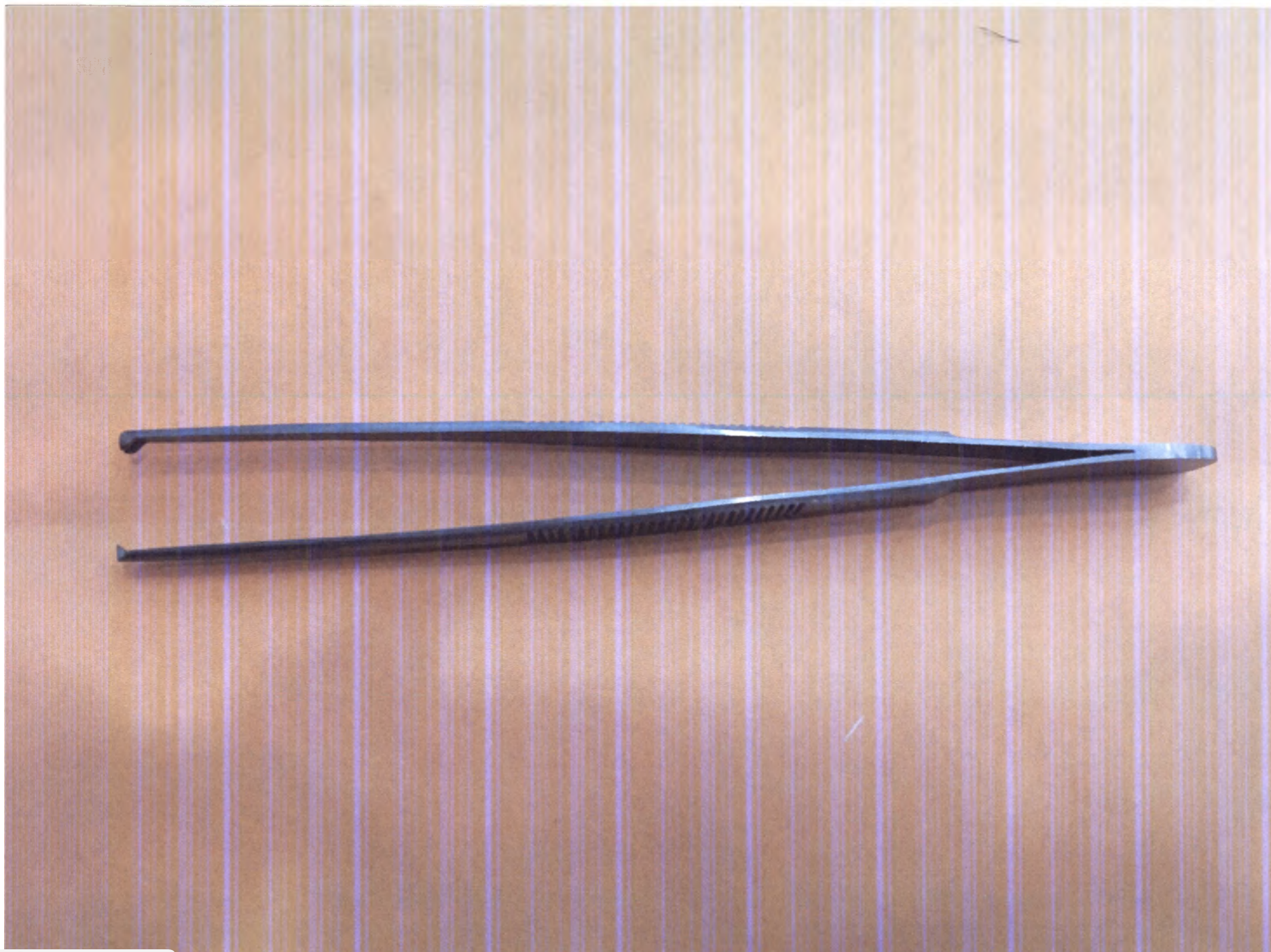

Скальпель хирургический острый не менее 150 мм.

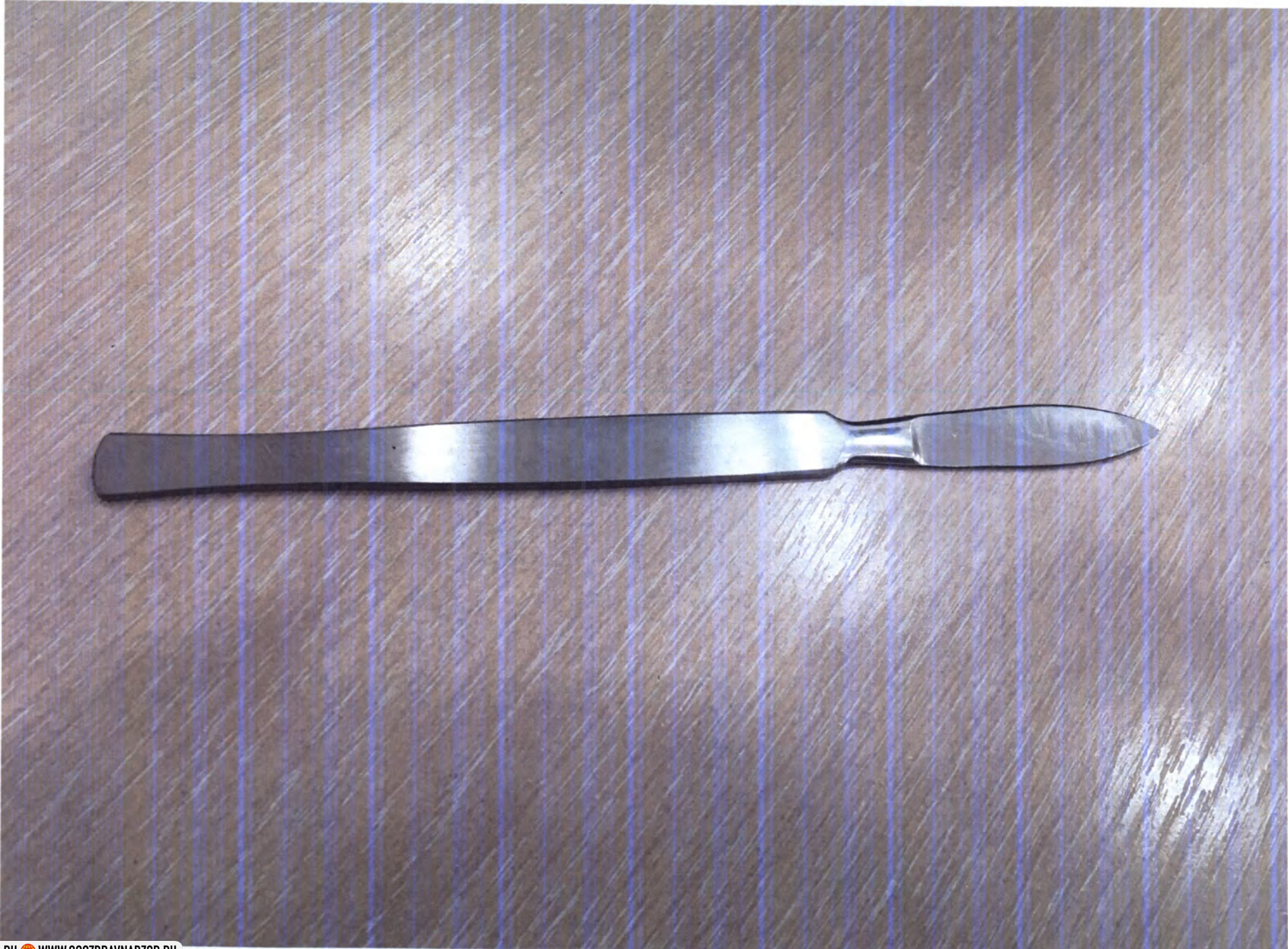


Ножницы прямые с 2-острыми концами не менее 140 мм.




Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОФ-1-200, объем 200 мкл.




Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОП-1-1000-1000, объем 1-10 мл.

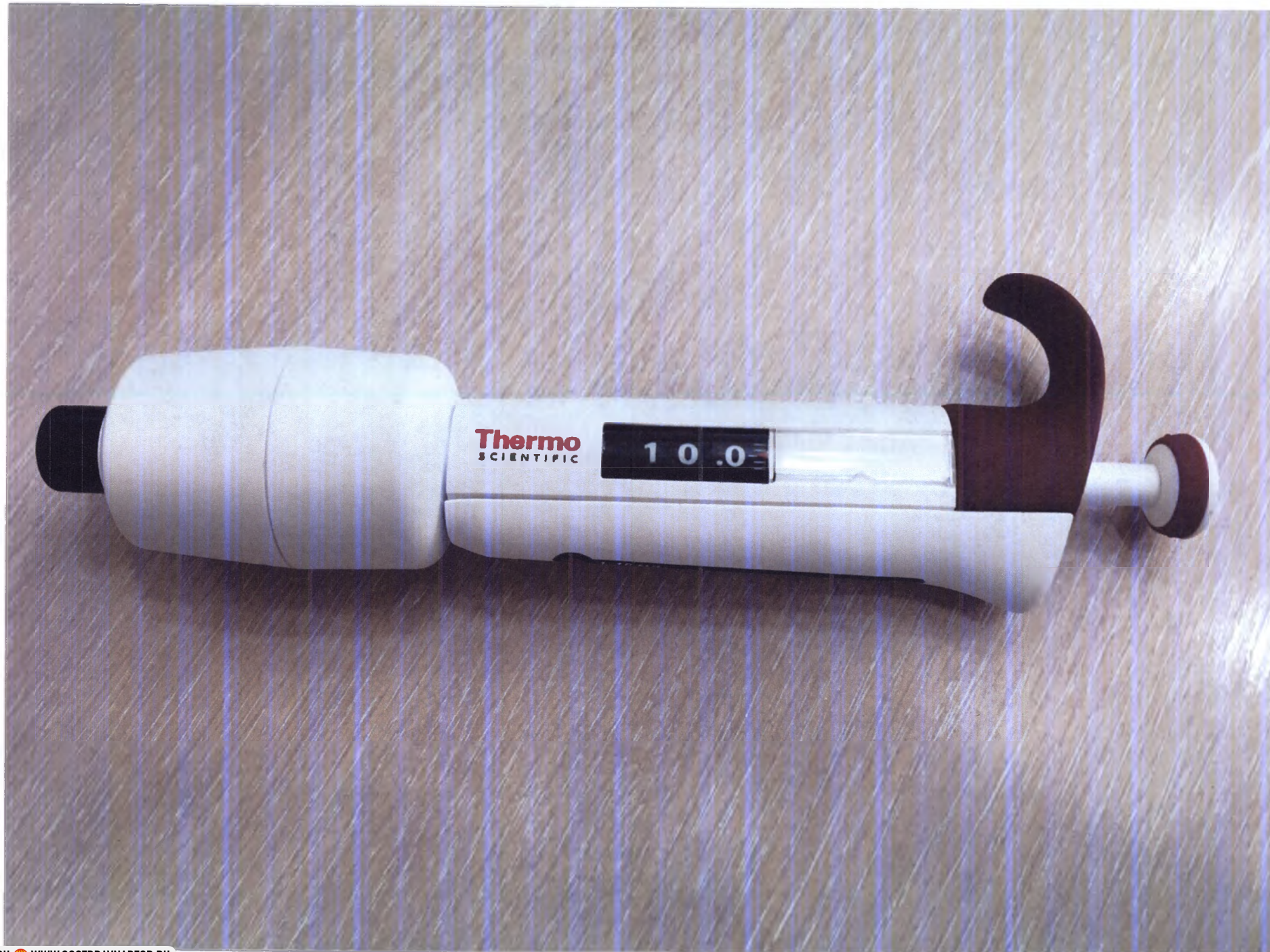


Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным 0,5-25мкл.

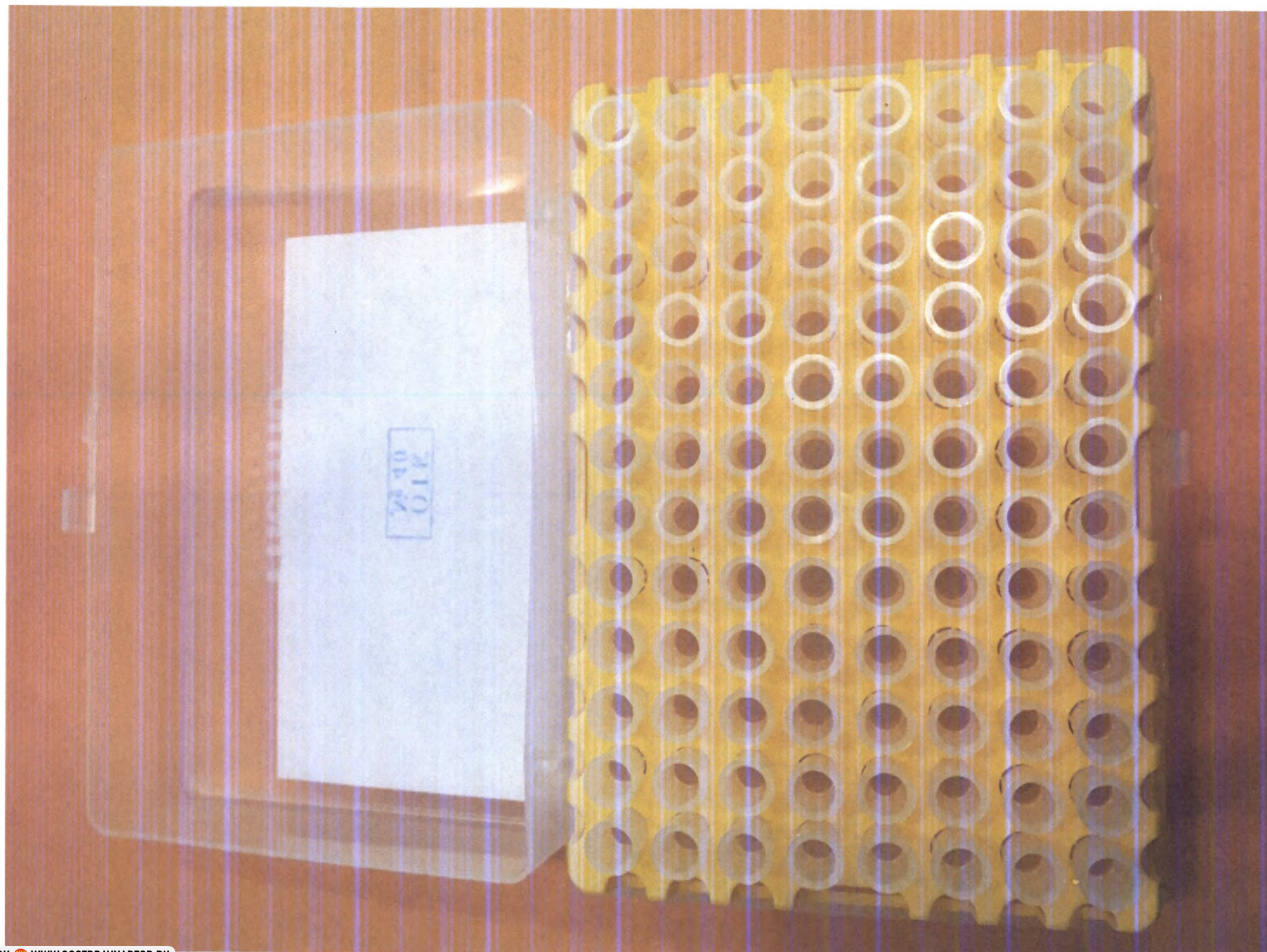

Наконечник полимерный к дозаторам пипеточным 1-10мл.

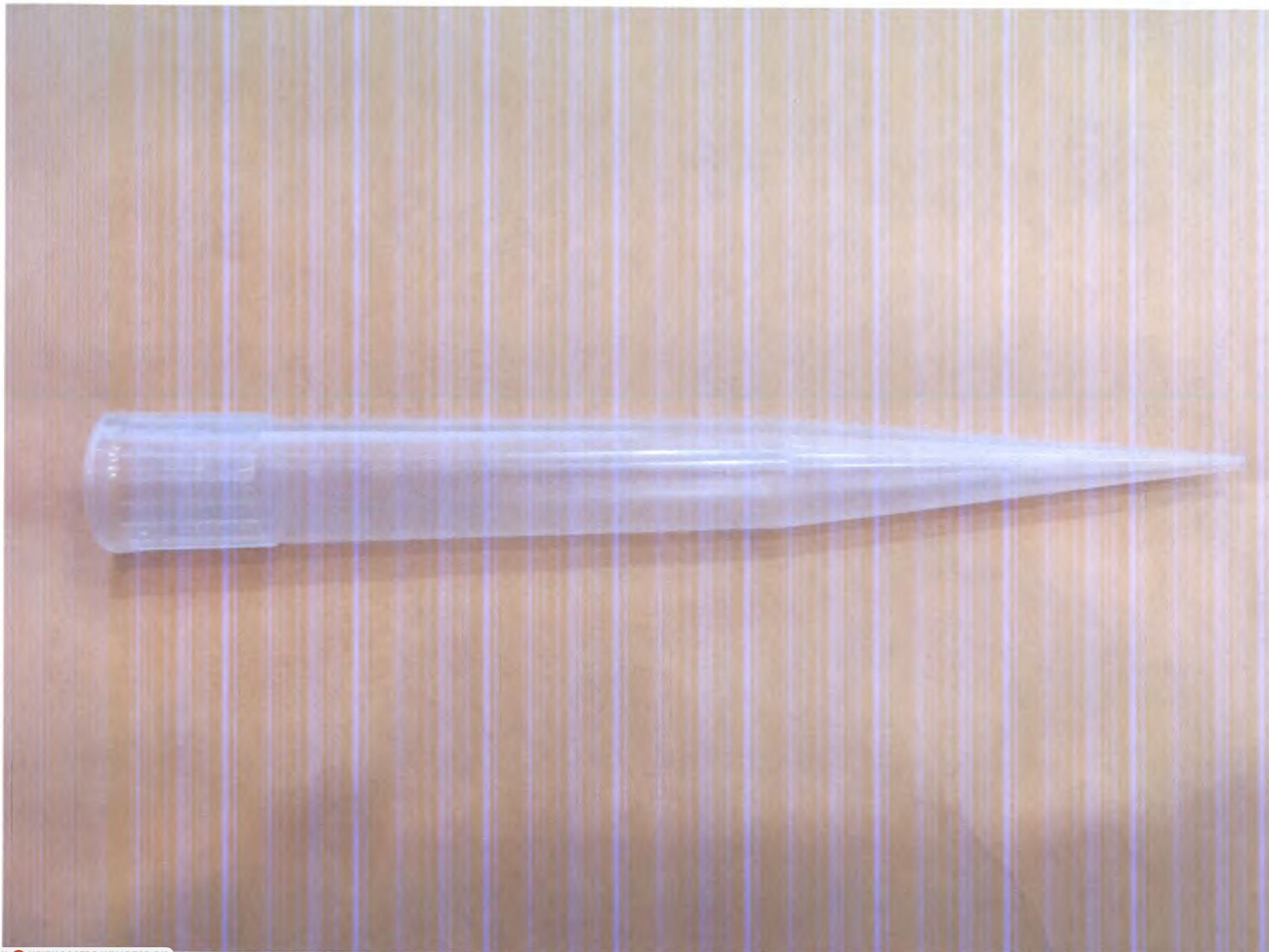


Штатив - бокс для криопробирок на 2 мл.

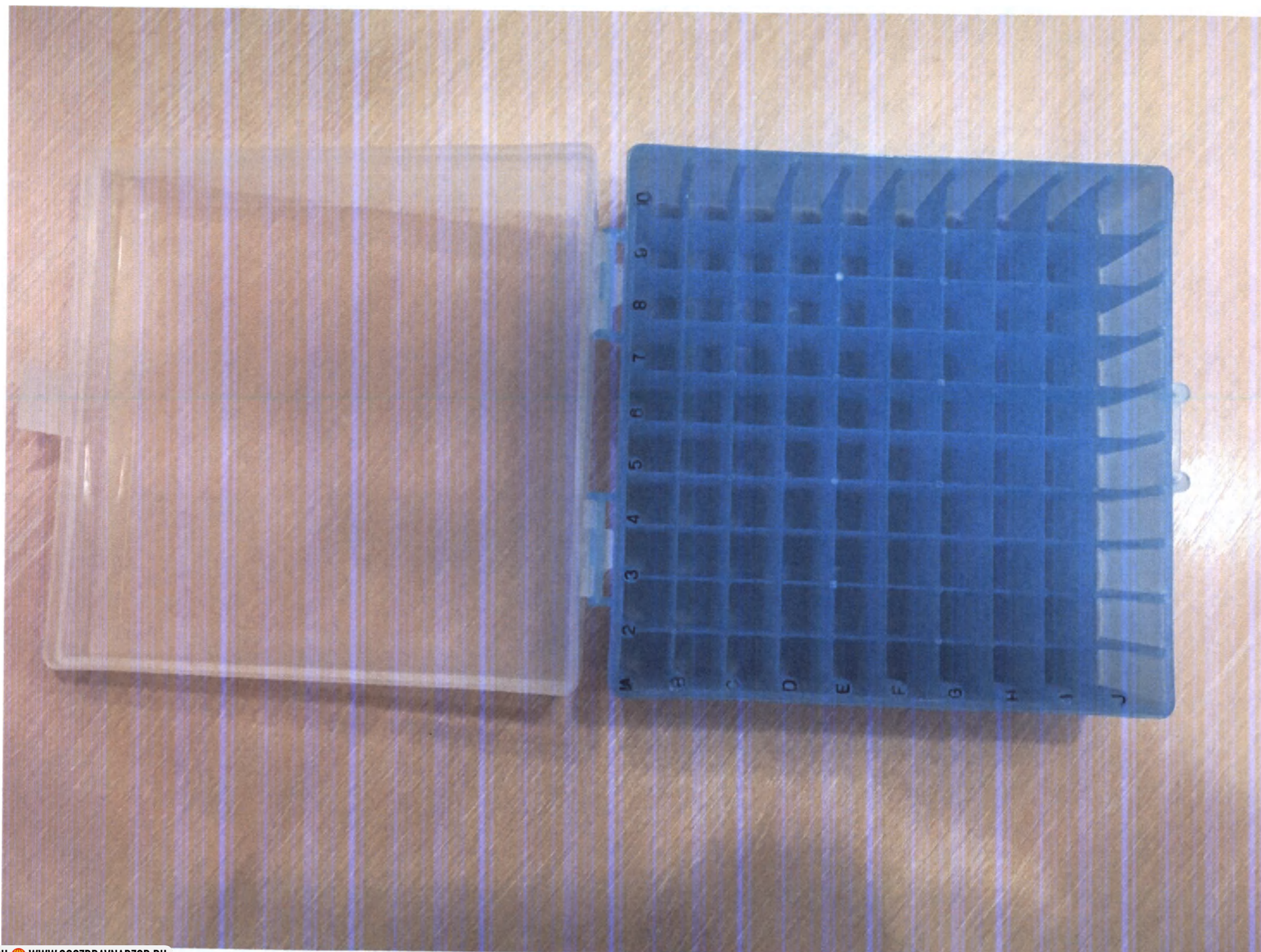


Штатив - бокс для пробирок Эппендорфа на 1,5 м.



Стекло предметное, со шлифованными краями

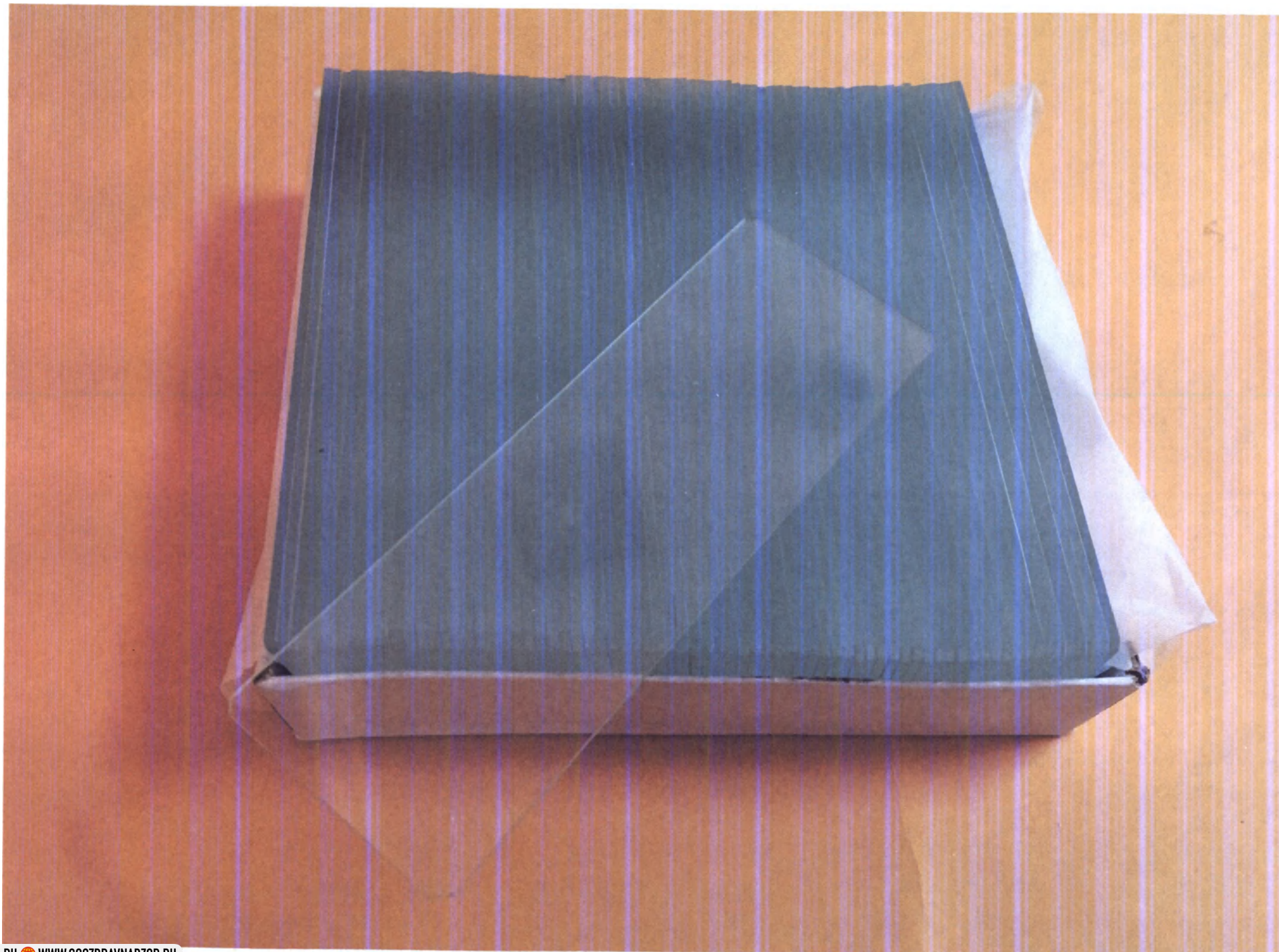

Стекло покрывное

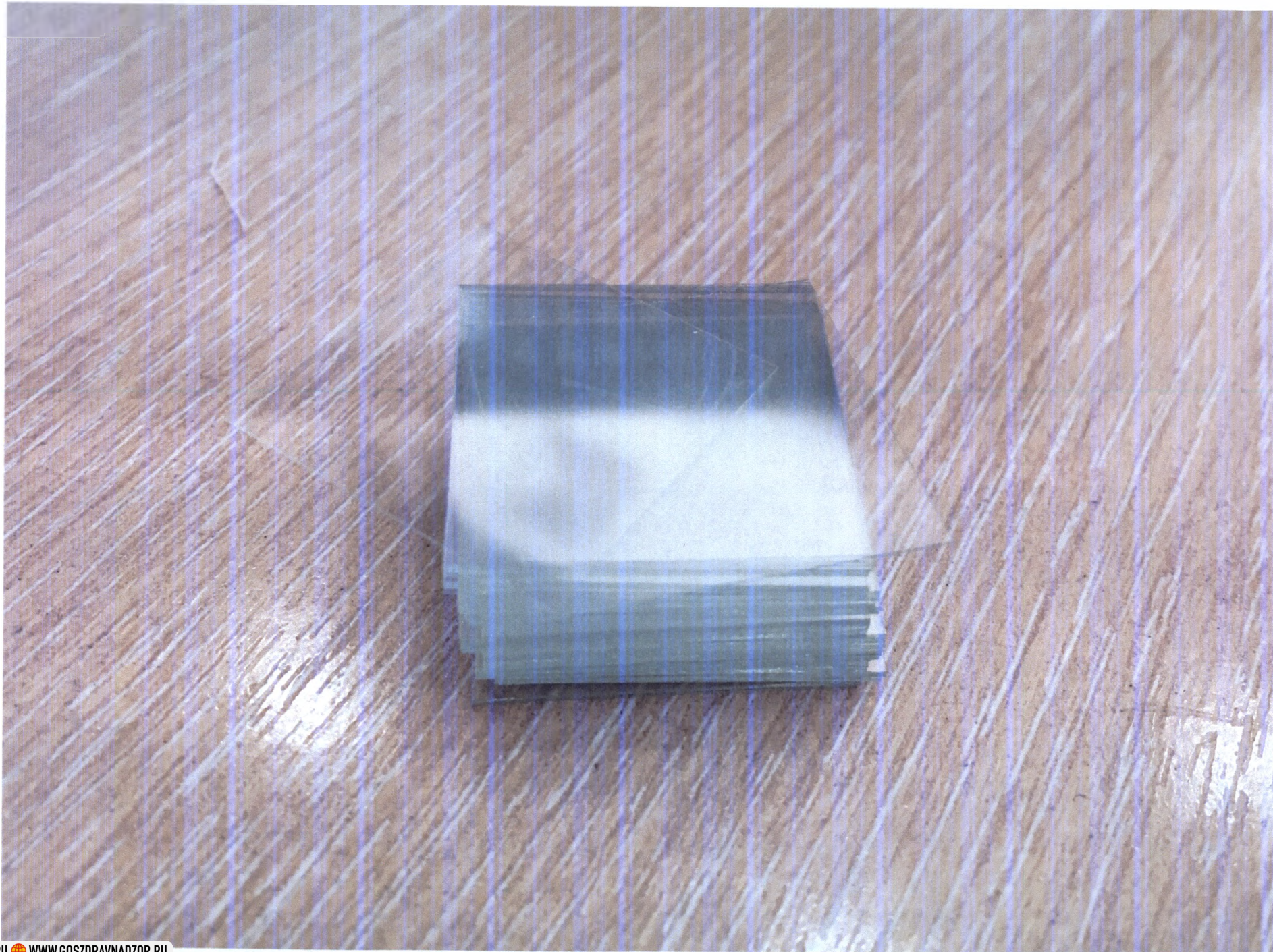


Спиртовка



Клеенка медицинская подкладная с ПВХ покрытием



**Средства индивидуальной защиты:
Комбинезон защитный с полимерным покрытием**

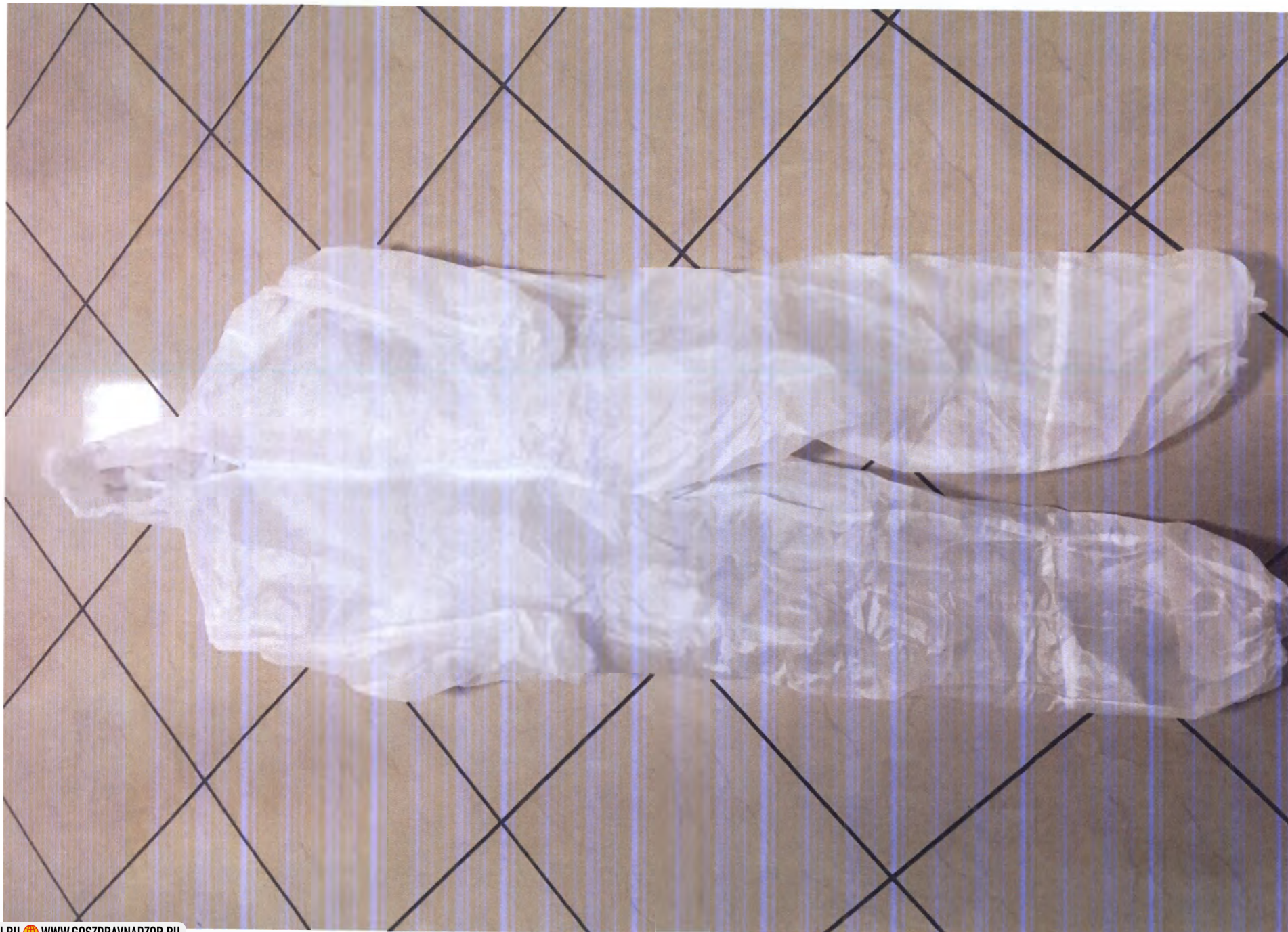

Фильтрующий респиратор




Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса, неопудренные




Бахилы хирургические "Стандарт"




Предметы для отбора проб из объектов окружающей среды:
Пинцет (не менее 150 мм) одноразового применения, стерильный

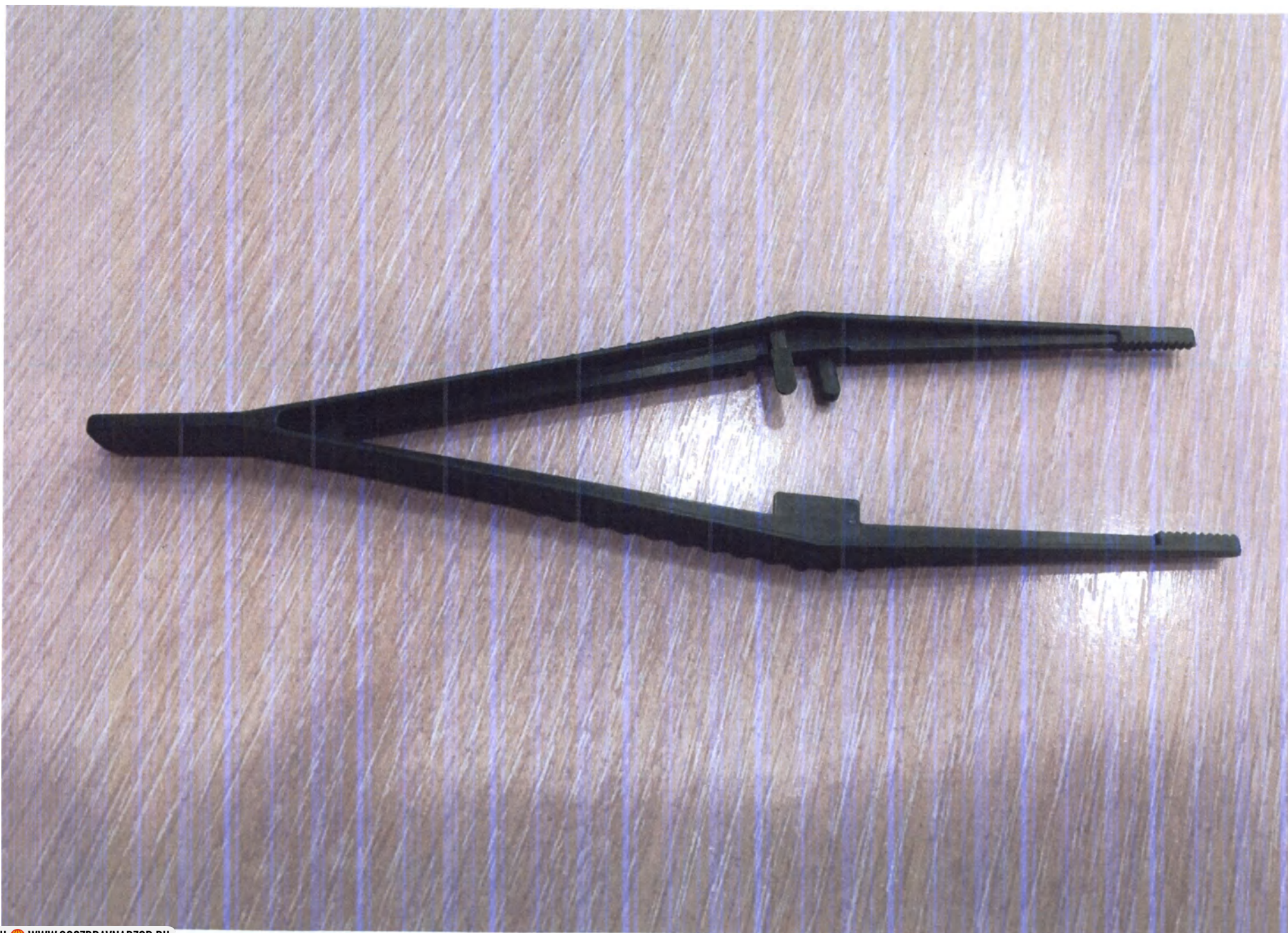

Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб (дерево/хлопок, стерильный, дл. 15см.)

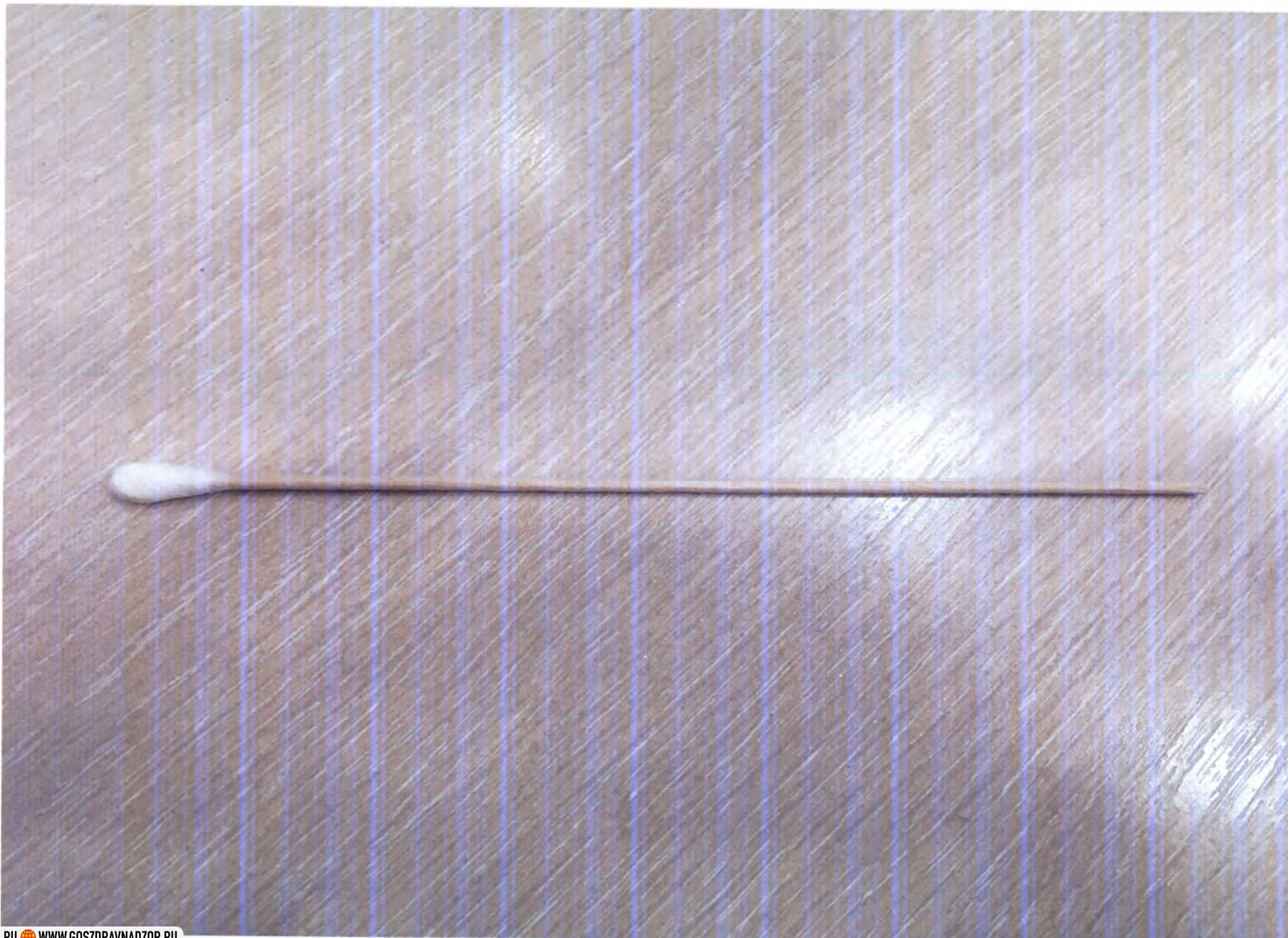

Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб, в комплекте с пустой пробиркой (дерево/хлопок, стерильный)

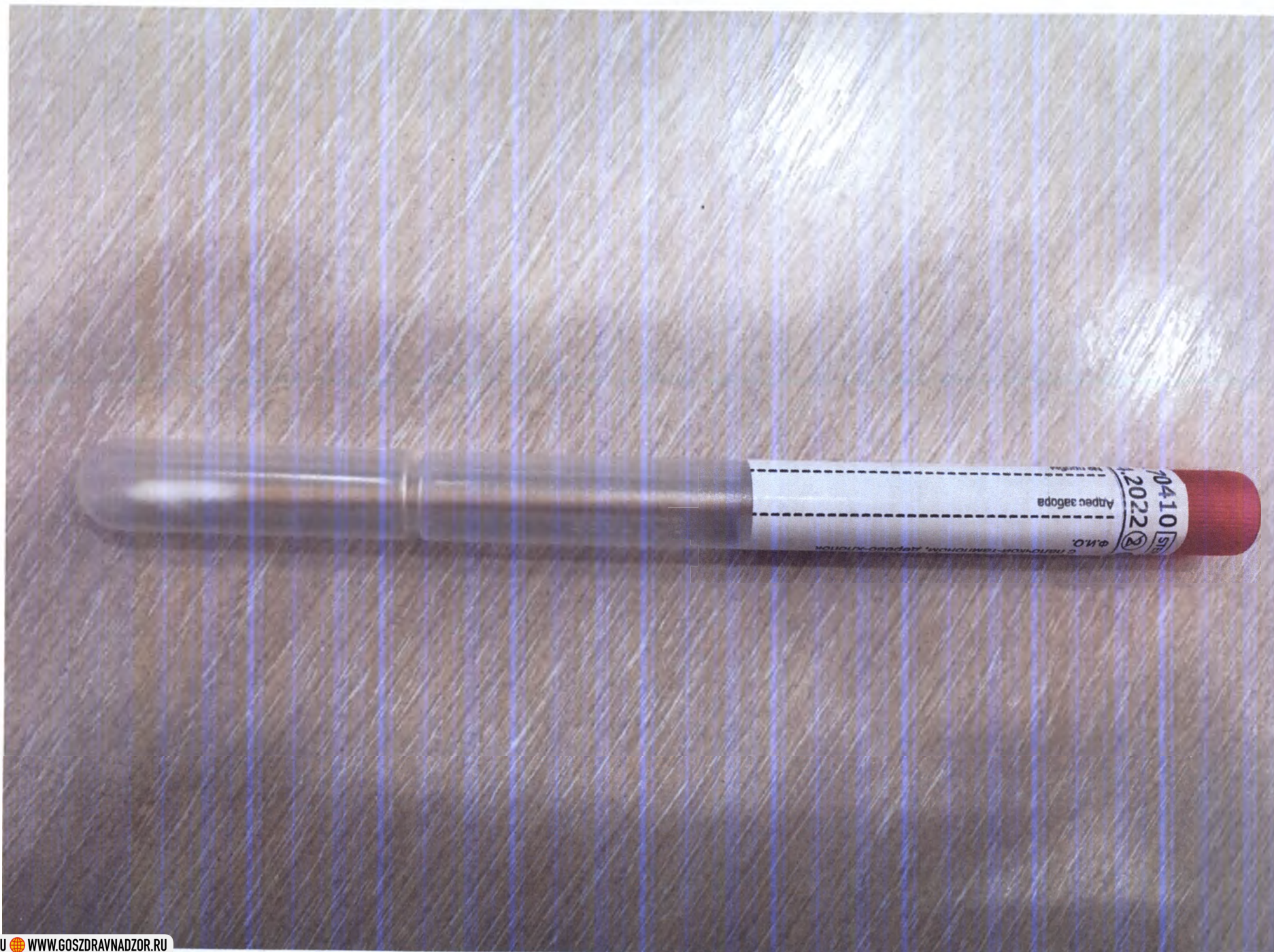

Скальпель хирургический однократного применения, стерильный



Пробирка микроцентрифужная 1,5 мл. типа «Эпандорф», нестерильная




Криопробирка с давлением, закручивающейся крышкой и юбкой устойчивости, стерильная 2,0 мл



Пакеты полиэтиленовые с застежкой-молнией 210x150 мм




Чашка с крышкой (Петри) пластмассовая лабораторная однократного применения, стерильные

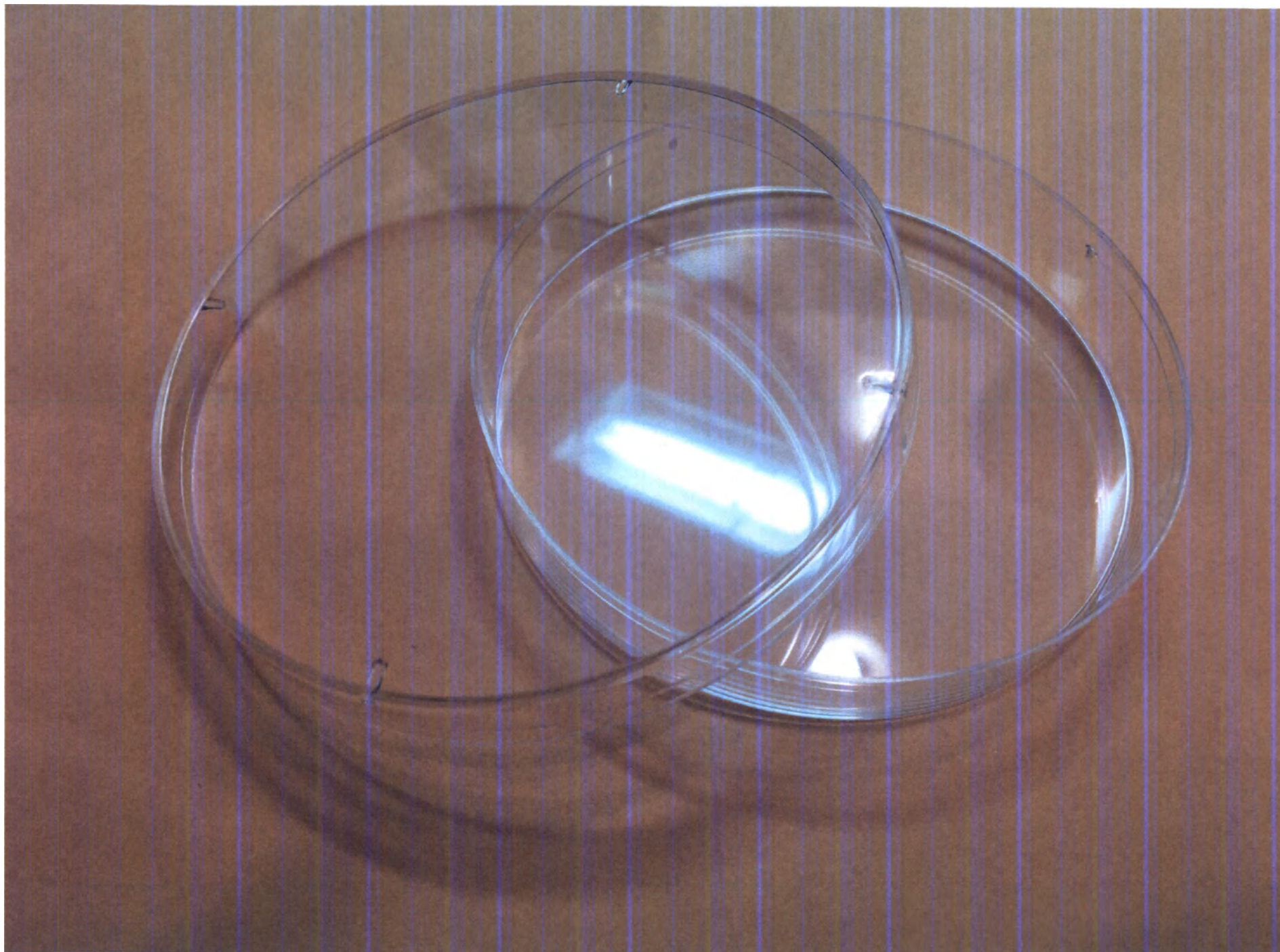


Ложка-совок (50 мл) для отбора проб полипропиленовая




Корнцанг прямой не менее 250мм, многоразовый

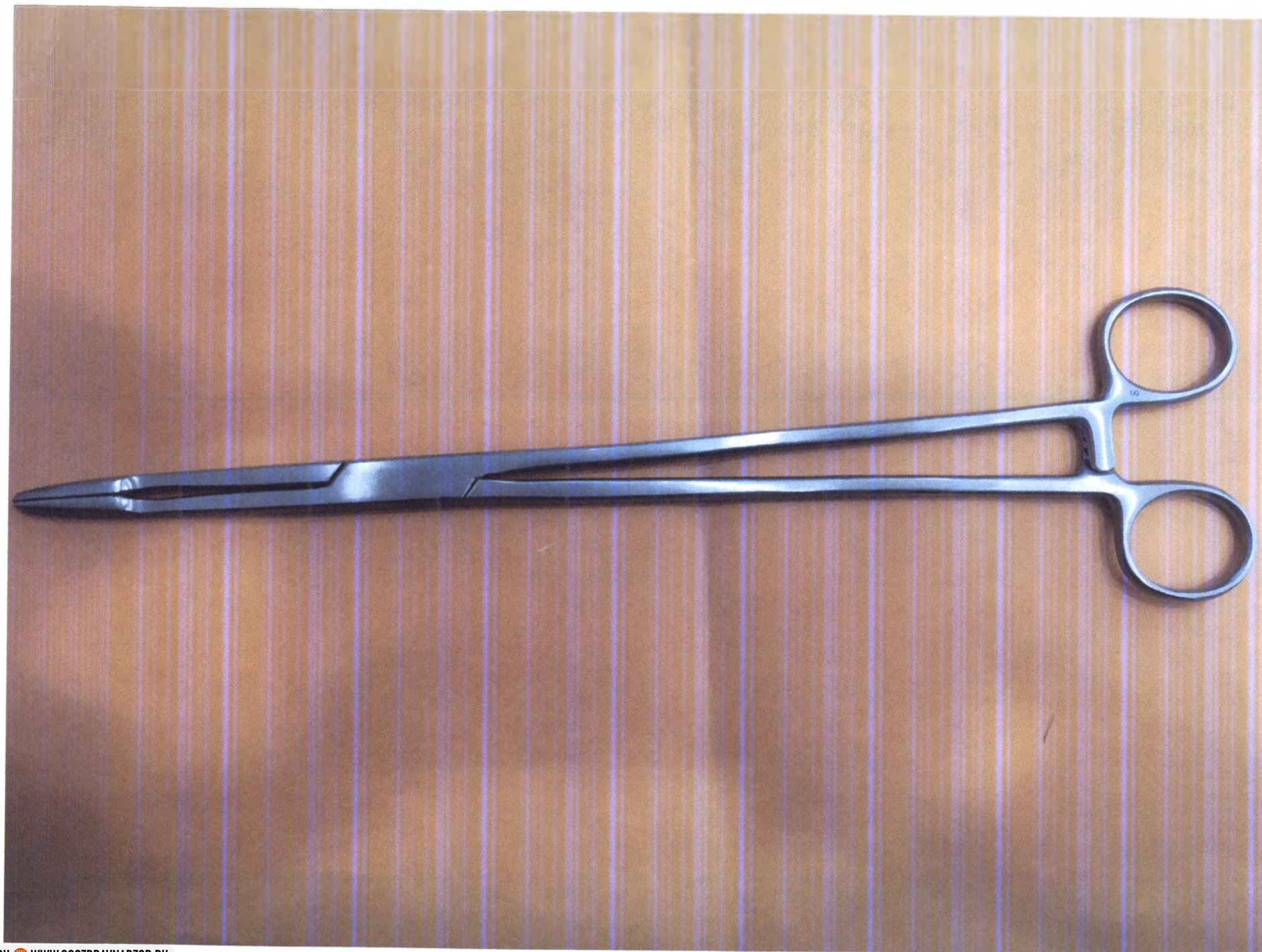

Предметы для хранения и транспортировки проб из объектов окружающей среды:
Контейнер полипропиленовый с завинчивающейся крышкой, стерильный емкостью не менее 100 мл.

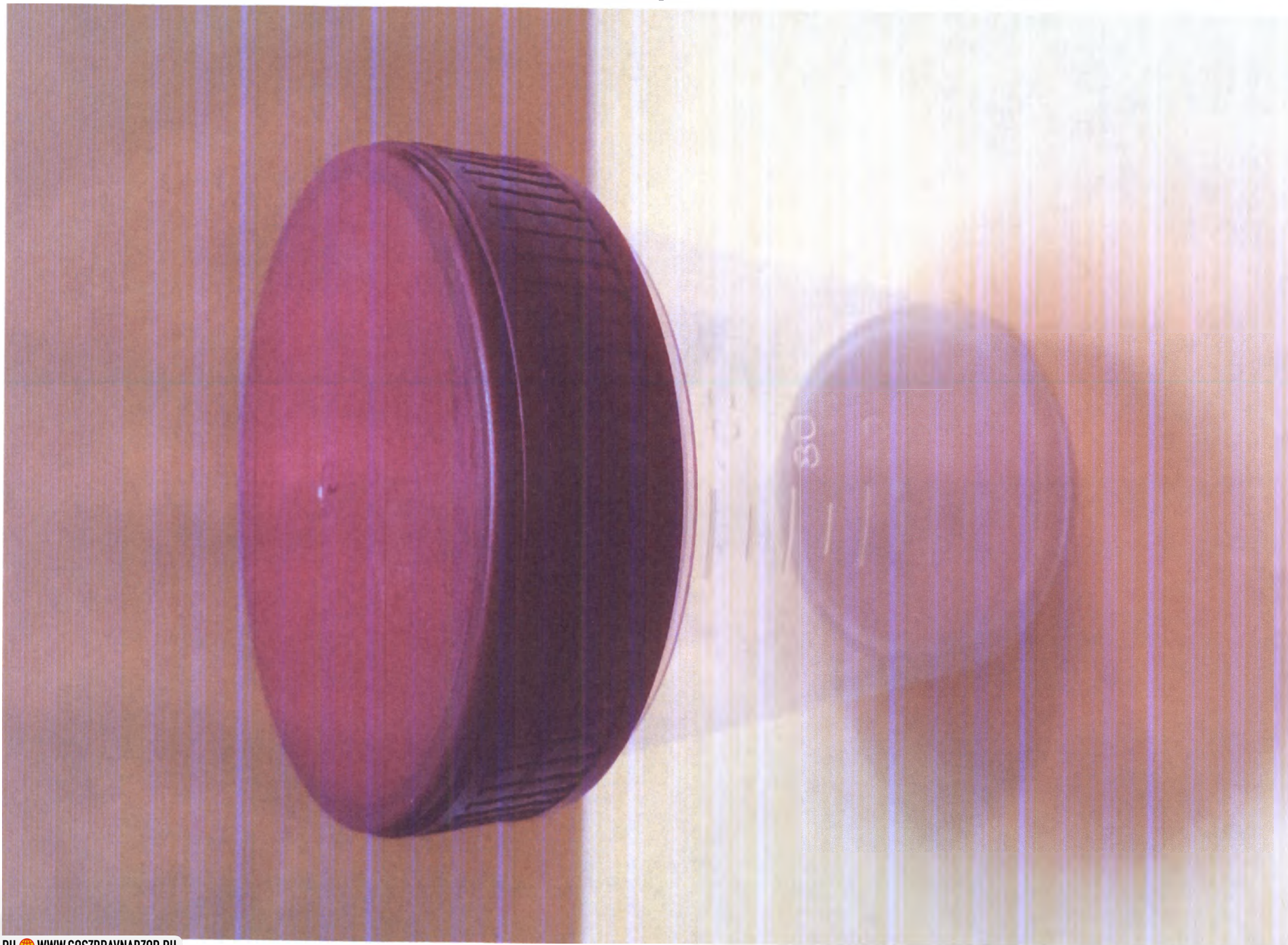

Контейнер полипропиленовый с завинчивающейся крышкой с лопаткой, стерильный емкостью не менее 50 мл.

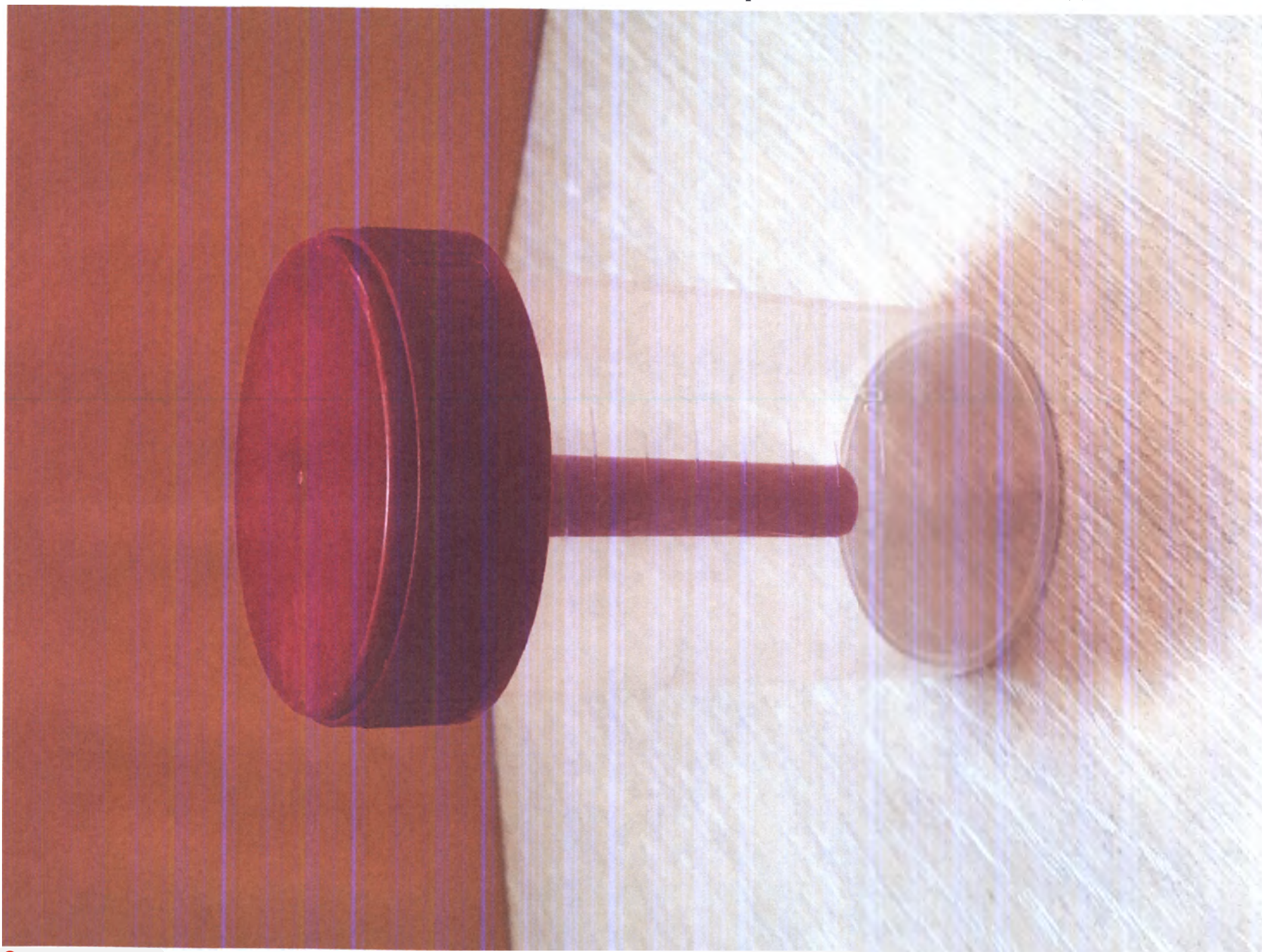


Банка стеклянная (1000 мл) с притертой крышкой, автоклавируема




Салфетка марлевая медицинская, стерильная



Сопутствующие предметы:
Контейнер полимерный с крышкой для предстерилизационной очистки

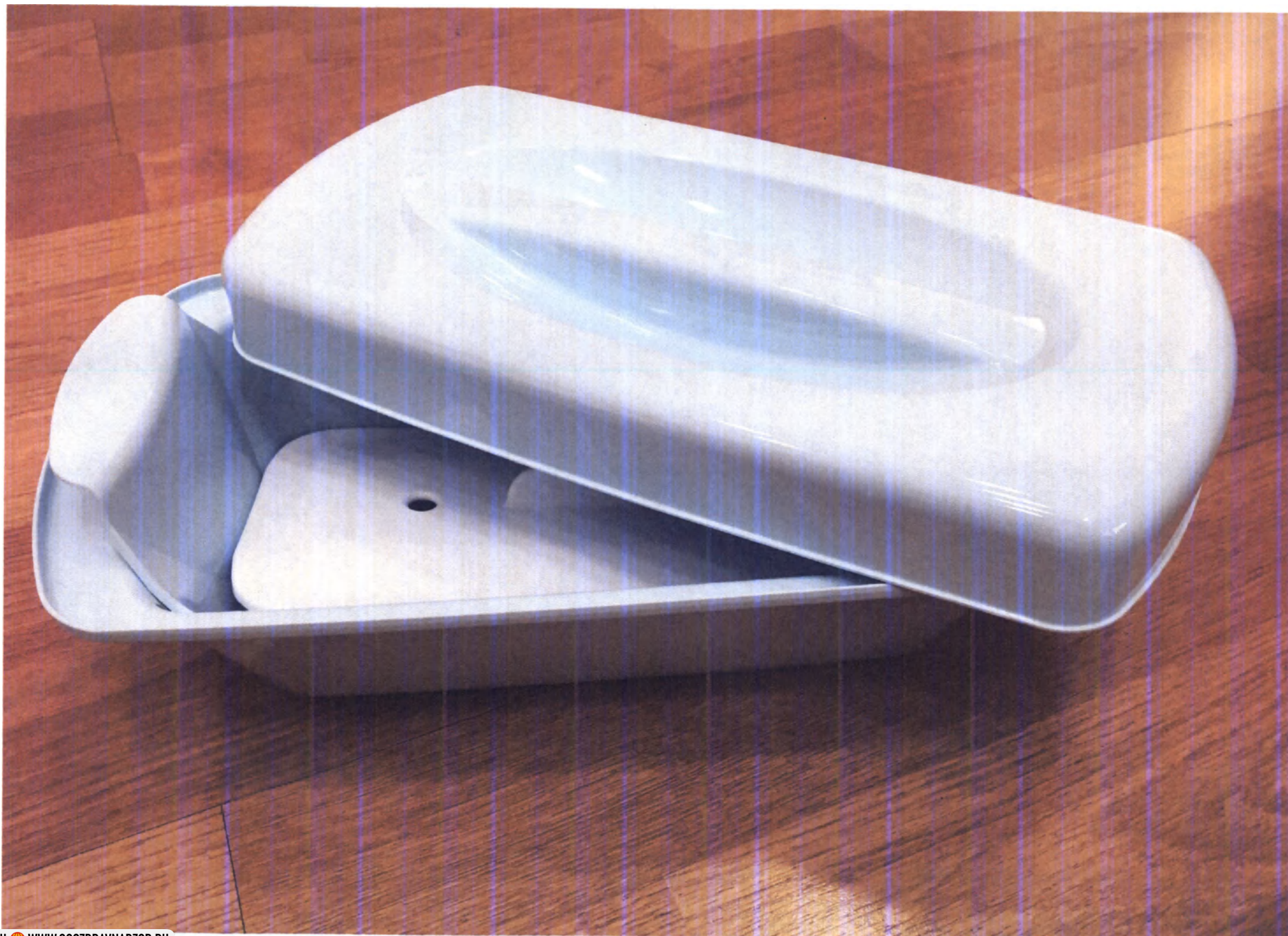

Ручка шариковая

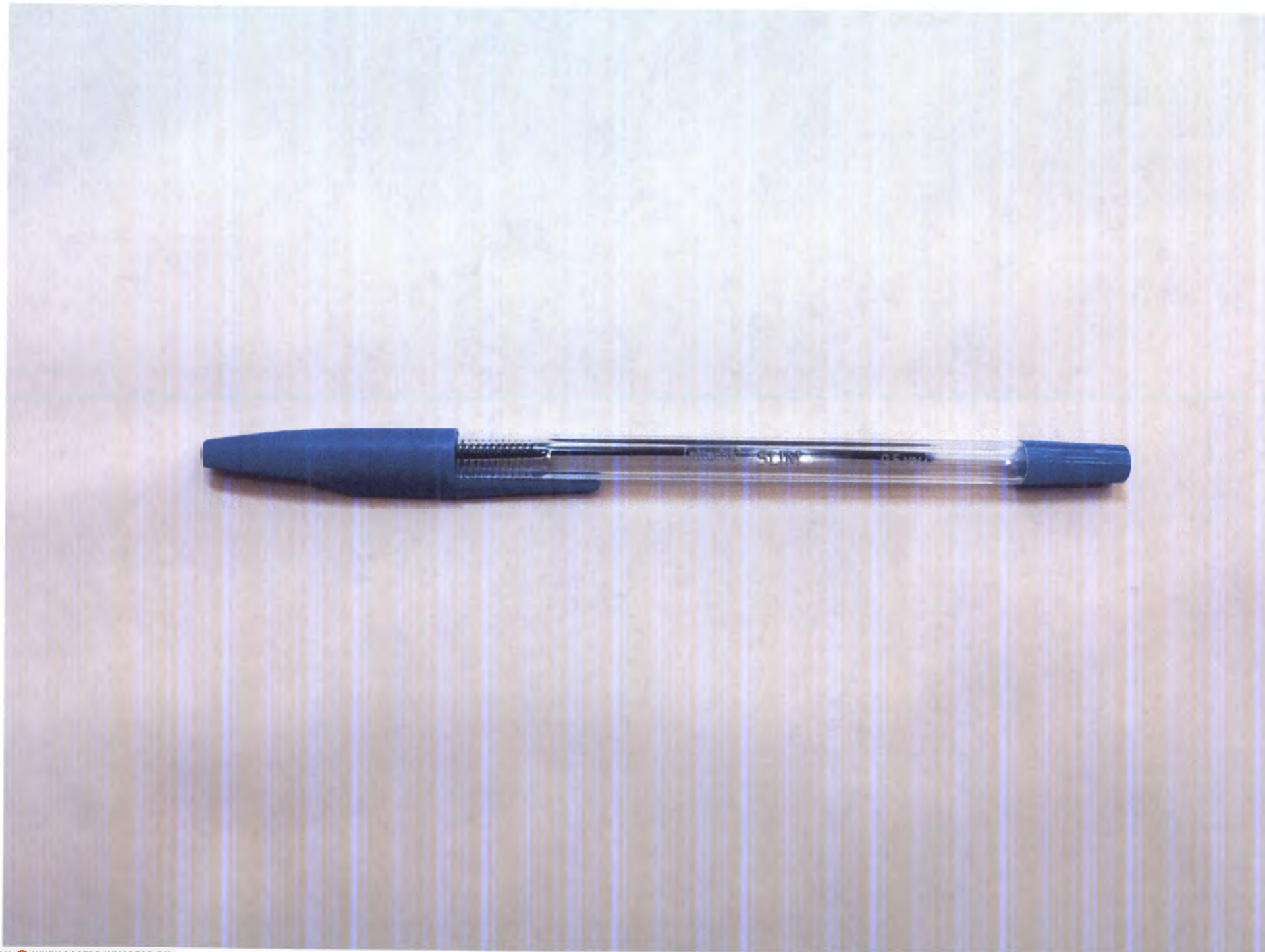

Простой карандаш




Маркер перманентный



Ножницы




Клей ПВА-М

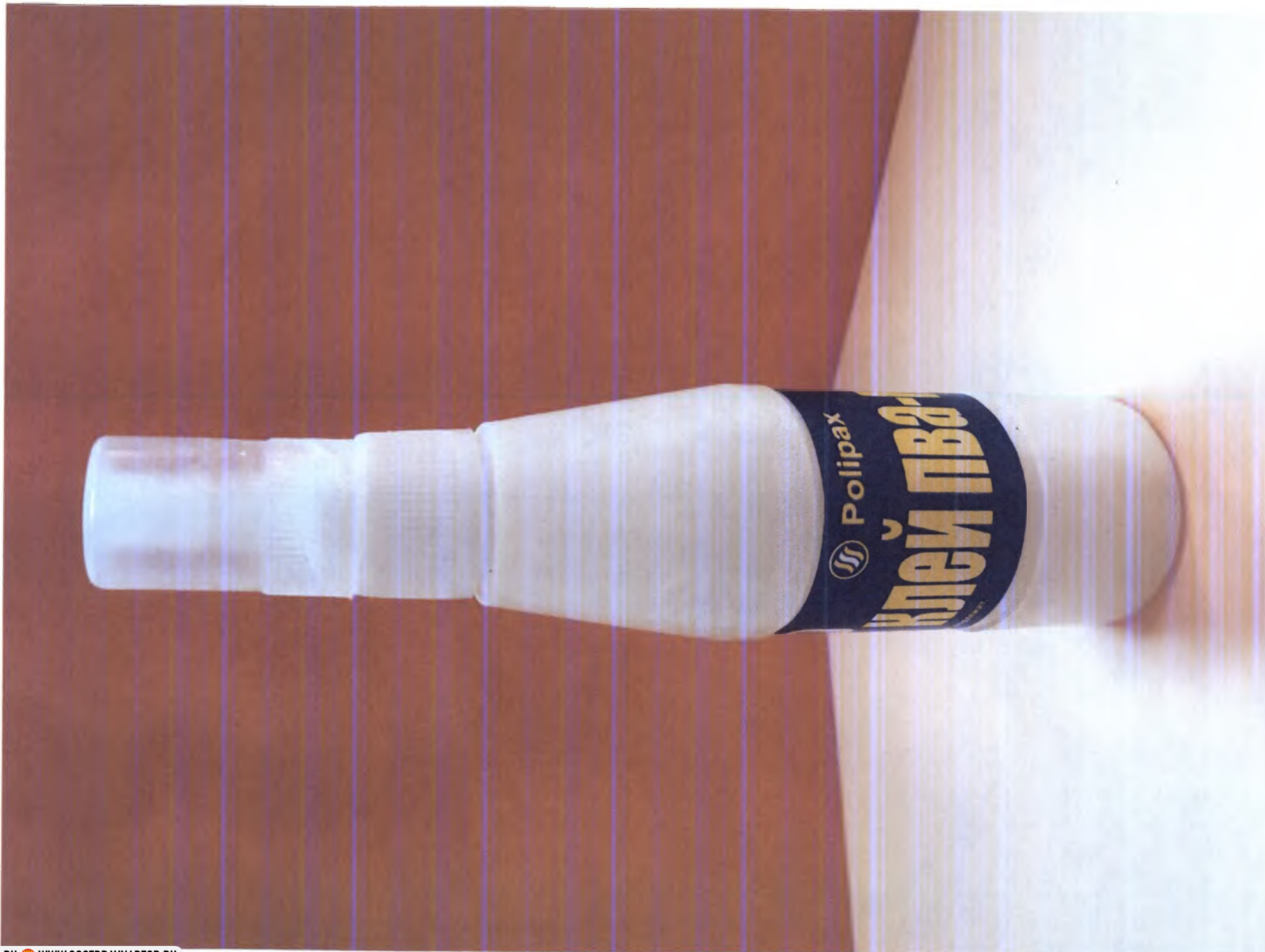


Скрепки канцелярские




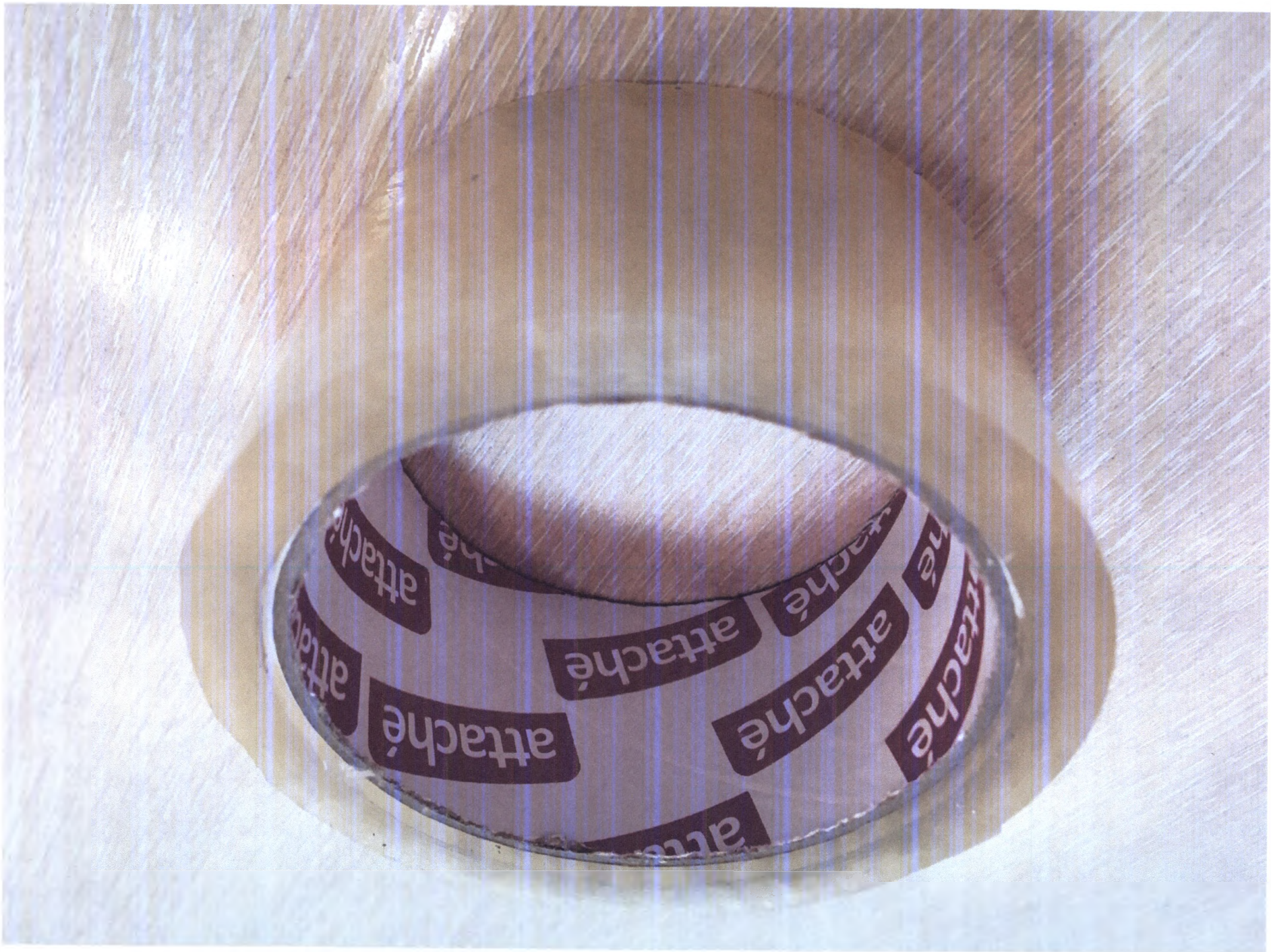


Папка с зажимом

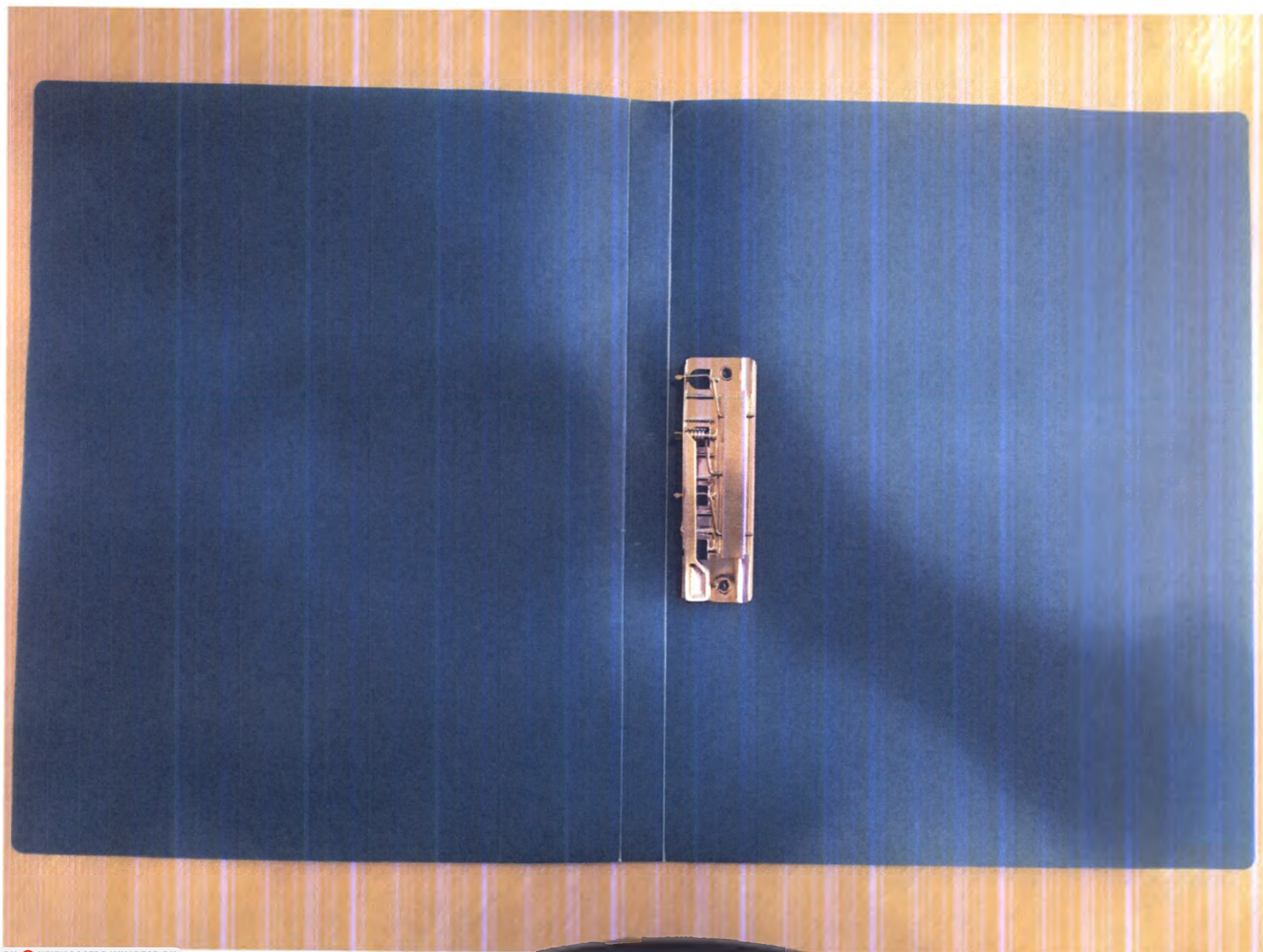


Бумага листовая А4

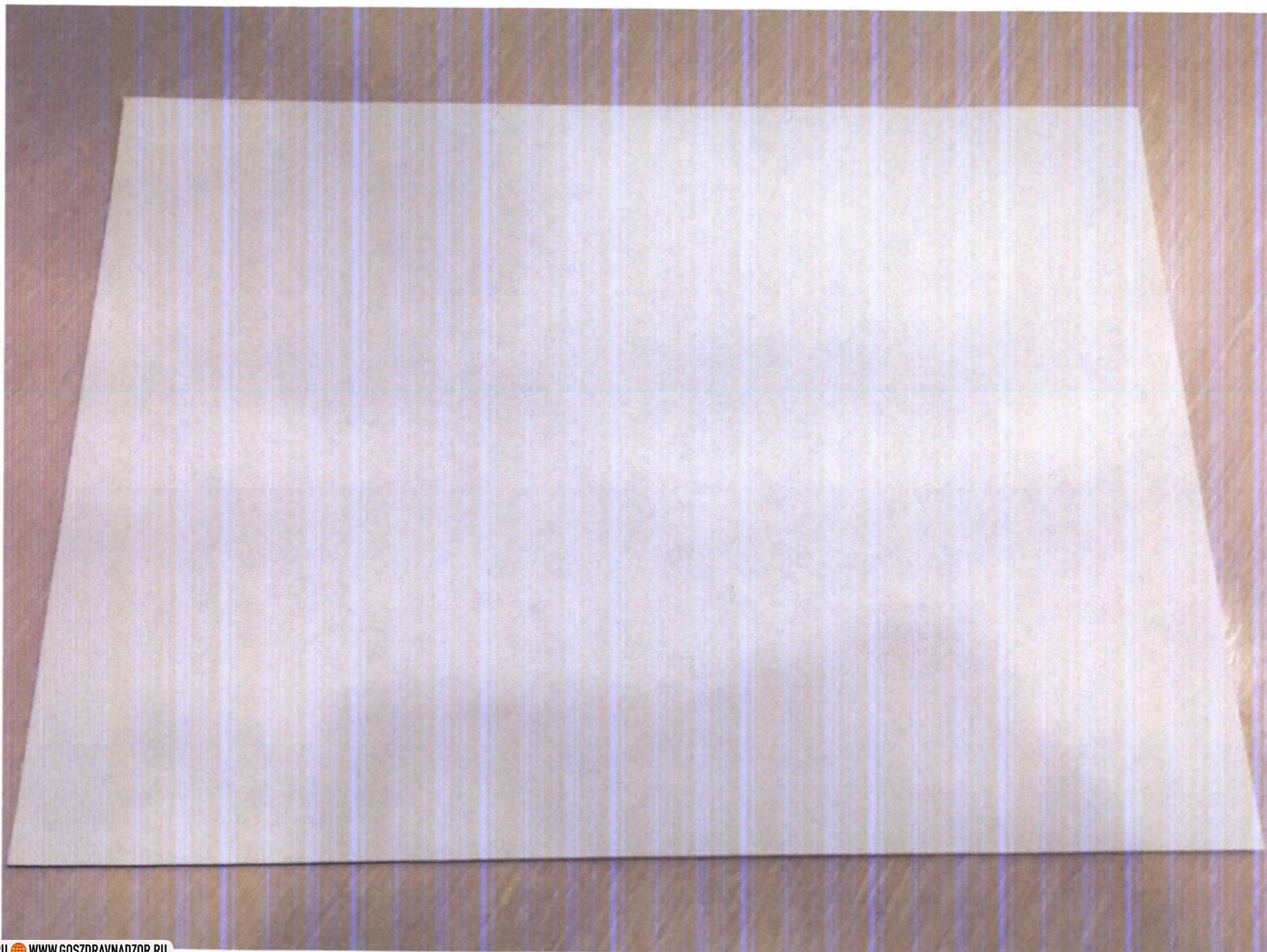

Бумага фильтровальная

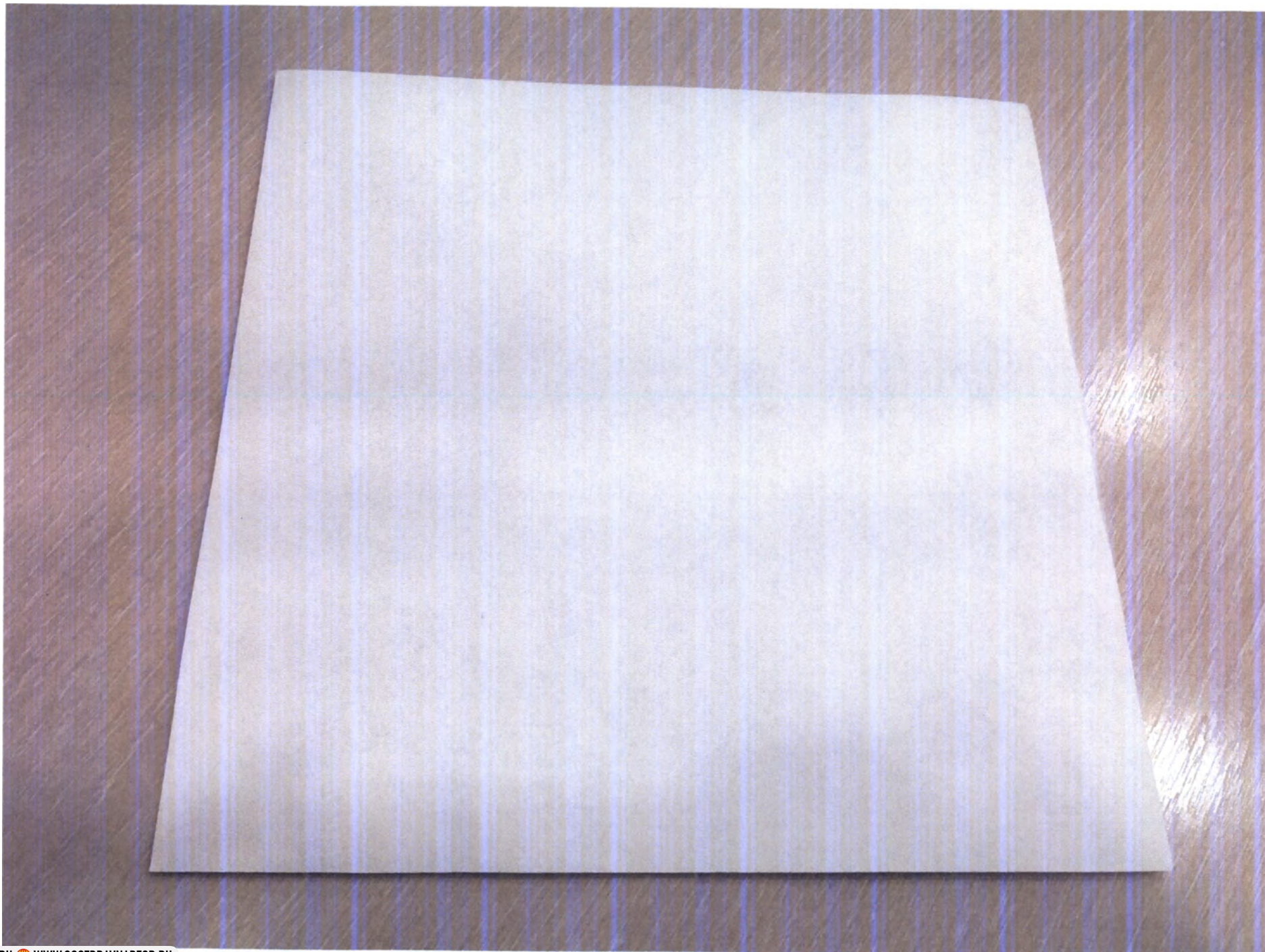


Бумага копировальная

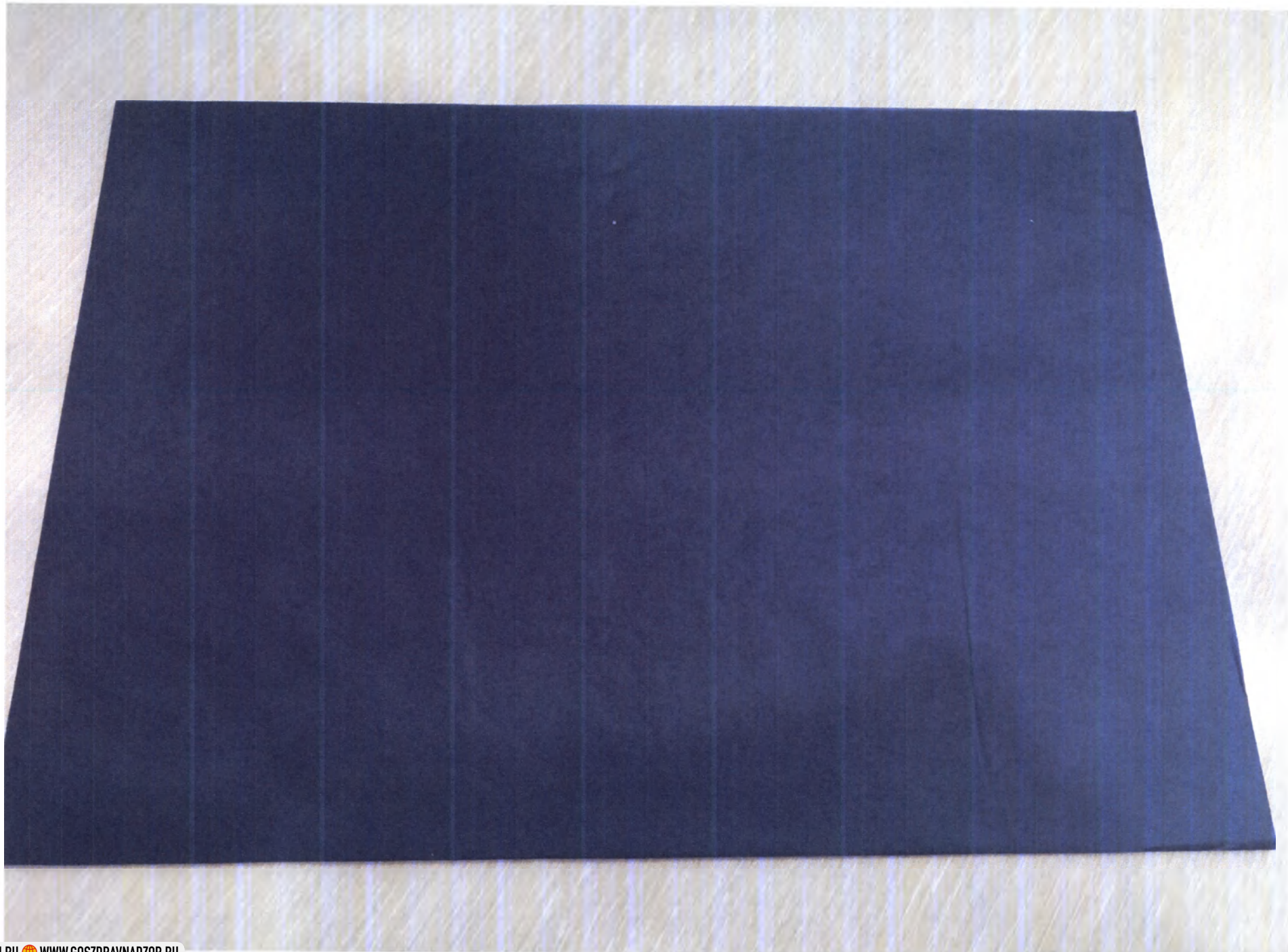

Скотч «Биологическая опасность»



Оградительная лента «Биологическая опасность»

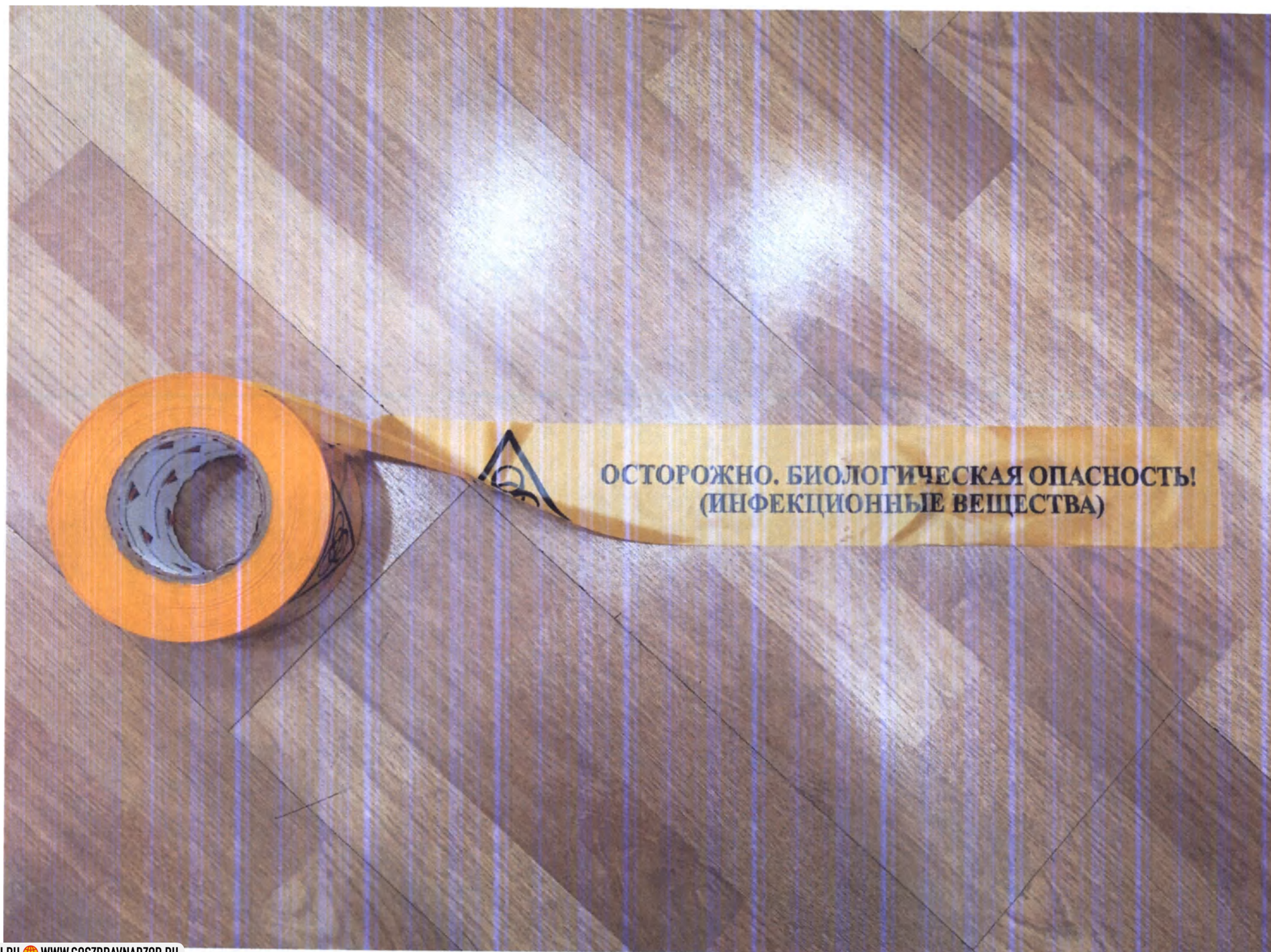





The label is yellow and rectangular. On the left side, there is a black biohazard symbol inside a triangle. To the right of the symbol, there are four horizontal lines for writing. Below the symbol, the text "ФИО" is printed, followed by a horizontal line. To the right of "ФИО", the text "Дата" is printed, followed by a horizontal line.

ФИО _____

Дата _____

ПРАВИЛА ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТ БОЛЬНОГО (ТРУПА) ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЧУМОЙ, ХОЛЕРЫ, МАЛЯРИИ И ДРУГИМИ ОСОБО ОПАСНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

6.1. Общие положения

Забор материала, как правило, производят в инфекционном стационаре. Забор клинического материала и его упаковку от больных и лиц, подозрительных на заражение или заболевание, осуществляют до начала лечения антибиотиками и другими химиопрепаратами врач-инфекционист или терапевт (хирург) стационара, где госпитализирован больной, в присутствии и под руководством вирусолога ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" или противочумного учреждения с соблюдением режима безопасности работы с материалом, подозрительным на зараженность возбудителями I-II групп патогенности. Секционный материал отбирают медицинские работники патологоанатомических отделений (БСМЭ) в присутствии специалиста по особо опасным инфекциям.

Материал забирают до начала специфического лечения стерильными инструментами в стерильную посуду.

Общие требования к забору проб биологического материала.

Для предохранения от инфицирования при заборе проб биоматериала и доставке их в лабораторию медицинский работник должен соблюдать следующие требования:

- не загрязнять наружную поверхность посуды при заборе и доставке проб;
- не загрязнять сопроводительные документы (направления);
- свести к минимуму непосредственный контакт пробы биоматериала с руками медицинского работника, забирающего и доставляющего пробы в лабораторию;
- использовать стерильные одноразовые или разрешенные к применению для этих целей в установленном порядке контейнеры (емкости) для забора, хранения и доставки проб;
- транспортировать пробы в переносках или укладках с отдельными гнездами;
- соблюдать асептические условия в процессе выполнения инвазивных мероприятий для предотвращения инфицирования пациента;
- забирать пробы в стерильную посуду, незагрязненную биоматериалом, не имеющую дефектов.

Весь инструментарий и другие предметы, использованные для взятия материала, обеззараживают кипячением в 2% растворе соды (или другого моющего средства) в течение 60 минут с момента закипания или в паровом стерилизаторе (пар под давлением 2,0 кг/кв. см, при 132 град. С) в течение 90 минут.

6.2. При подозрении на заболевание чумой

В зависимости от формы заболевания для исследования берут следующий материал:

- при кожной форме чумы - содержимое везикул, пустул, карбункулов, отделяемое язв, содержимое плотного инфильтрата, кровь;
- при бубонной - пунктат из бубона, кровь;
- при септической - кровь;
- при легочной - мокроту (слизь из зева), кровь.

Пунктат бубона

Материал из бубона берут стерильным шприцем емкостью не менее 5 мл.

НАПРАВЛЕНИЕ N _____ на исследование

от " ____ " _____ 200 ____ г.

Наименование объекта, адрес _____

время отбора _____ доставки _____

Условия транспортировки и хранения _____

Цель исследования _____

Дополнительные сведения _____

Вид упаковки _____

НТД на метод отбора _____

N пробы	Наименование пробы, образца	Количество	Место и точка отбора

Фамилия и подпись отобравшего пробы _____

Сумка специальная для укладки



Средства индивидуальной защиты:

Защитный комбинезон с капюшоном и эластичными манжетами на штанинах и рукавах, а так же резинкой по краю капюшона и на талии



Фильтрующий респиратор



Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса, неопудренные



Сапоги резиновые



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»



П А С П О Р Т

укладка противоэпидемическая медицинская УК-5Б

(УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ ЛЮДЕЙ И ОБЪЕКТОВ
ОКР.СРЕДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ)

ТУ 9398-005-45508262-2010

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13489 от XX.XX.XXXX года

1. Назначение

Укладки предназначены для проведения первичных противоэпидемических мероприятий:

- взятия материала от больных или умерших и из объектов окружающей среды в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и в пунктах пропуска через государственную границу;
- патологоанатомического вскрытия умерших людей или трупов животных, производимого в установленном порядке при болезнях неясной этиологии, подозрительных на особо опасную инфекционную болезнь;
- санитарно-эпидемиологического обследования эпидемического очага особо опасных инфекций (ООИ);
- выявления и учета лиц контактировавших с больными с подозрением на ООИ;
- своевременного проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага ООИ.

2. Комплектность поставки

Комплектность укладки указана в упаковочном листе.

3. Техническое обслуживание

После работы в очаге ООИ использованные принадлежности укладки ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ И ЧАСТИЧНО ДЕЗИНФЕКЦИИ (согласно пункту 2.1.5), в соответствии с нормативами по охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Укладки должны транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 4.2 Ящики с Укладками при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы была исключена возможность их самопроизвольного перемещения.
- 4.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться способами, исключающими удары и броски ящиков с Укладками.
- 4.4 Укладки должны транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

5. Гарантия изготовителя

- 5.1 Организация – изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2 Гарантийный срок хранения Укладок – 3 года со дня изготовления, одноразовых изделий – указано на упаковке изделий, но не более 1 года.

Изготовитель: ООО «Д-Медфарм» тел.: (812) 322-17-32, 305-04-76, 322-61-07

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н |

Дата изготовления: август 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
31 мая 2007 г.
Дата введения:
1 августа 2007 г.

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОЛЕРЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУК 4.2.2218-07

(с изм., внесенными Дополнением, утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 18.01.2008)

1. Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ю.М.Федоров, Н.Я.Жилина); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт" (Ю.М.Ломов, Б.Н.Мишанькин, Л.С.Подосинникова, Л.Г.Воронежская, И.Я.Черепяхина, Т.А.Кудрякова, Б.Л.Мазрухо, Л.М.Смоликова, И.В.Рыжко, Р.И.Цураева, Э.А.Москвитина, Б.П.Голубев, С.О.Водопьянов, Е.В.Монахова, В.Д.Кругликов, Н.Р.Телесманич, А.Б.Мазрухо, В.В.Агафонова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Противочумный Центр" (А.А.Кюрегян, С.М.Иванова, Ю.С.Королев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" (А.К.Адамов, З.В.Малыхина, Т.В.Бугоркова, Н.И.Смирнова, Л.Ф.Ливанова, А.В.Топорков, С.И.Заднова, Н.А.Осина, Е.С.Казакова, Н.Б.Челдышева, А.В.Осин); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" (А.С.Марамович, В.С.Ганин, Л.Я.Урбанович, В.И.Погорелов, Л.В.Миронова, Е.С.Куликалова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" (В.Н.Савельев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Причерноморская противочумная станция" (Г.В.Гальцева); Государственным Центром по антибиотикам (С.В.Сидоренко); Российской медицинской академией последипломного образования (Е.А.Ведьмина); ГИСК им. Л.А.Тарасевича (Т.И.Анисимова, Л.В.Саяпина).


2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 31 мая 2007 г.

3. Введены взамен методических указаний "Лабораторная диагностика холеры" МУ 4.2.1097-02.


1. Область применения

1.1. Методические указания "Лабораторная диагностика холеры" разработаны для внедрения и применения действующих нормативных документов, определяющих требования к

Укладка противоэпидемическая медицинская универсальная УК-5М (общий вид упаковки)

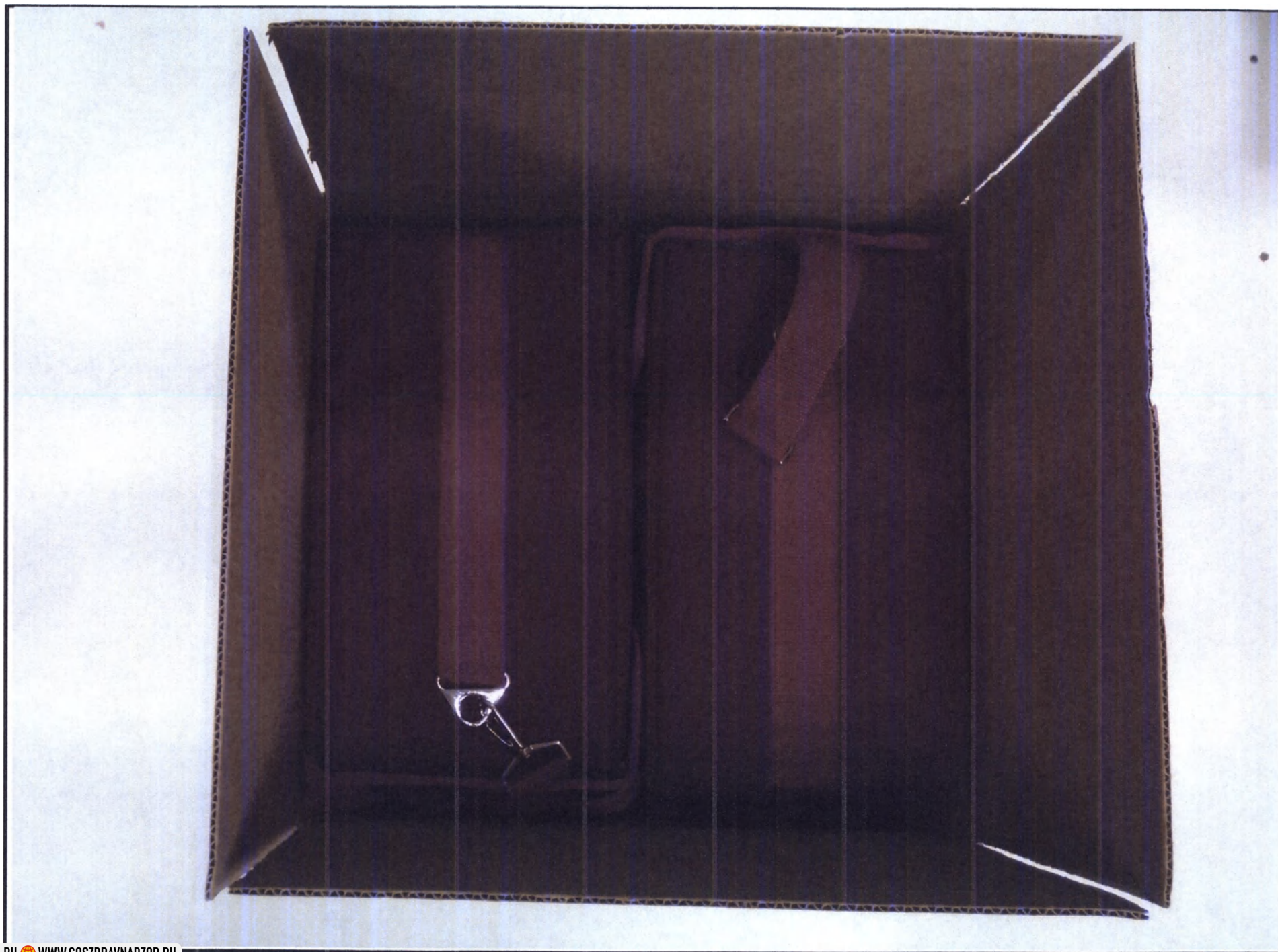

Укладка противозидемическая медицинская универсальная УК-5М (общий вид упаковки)

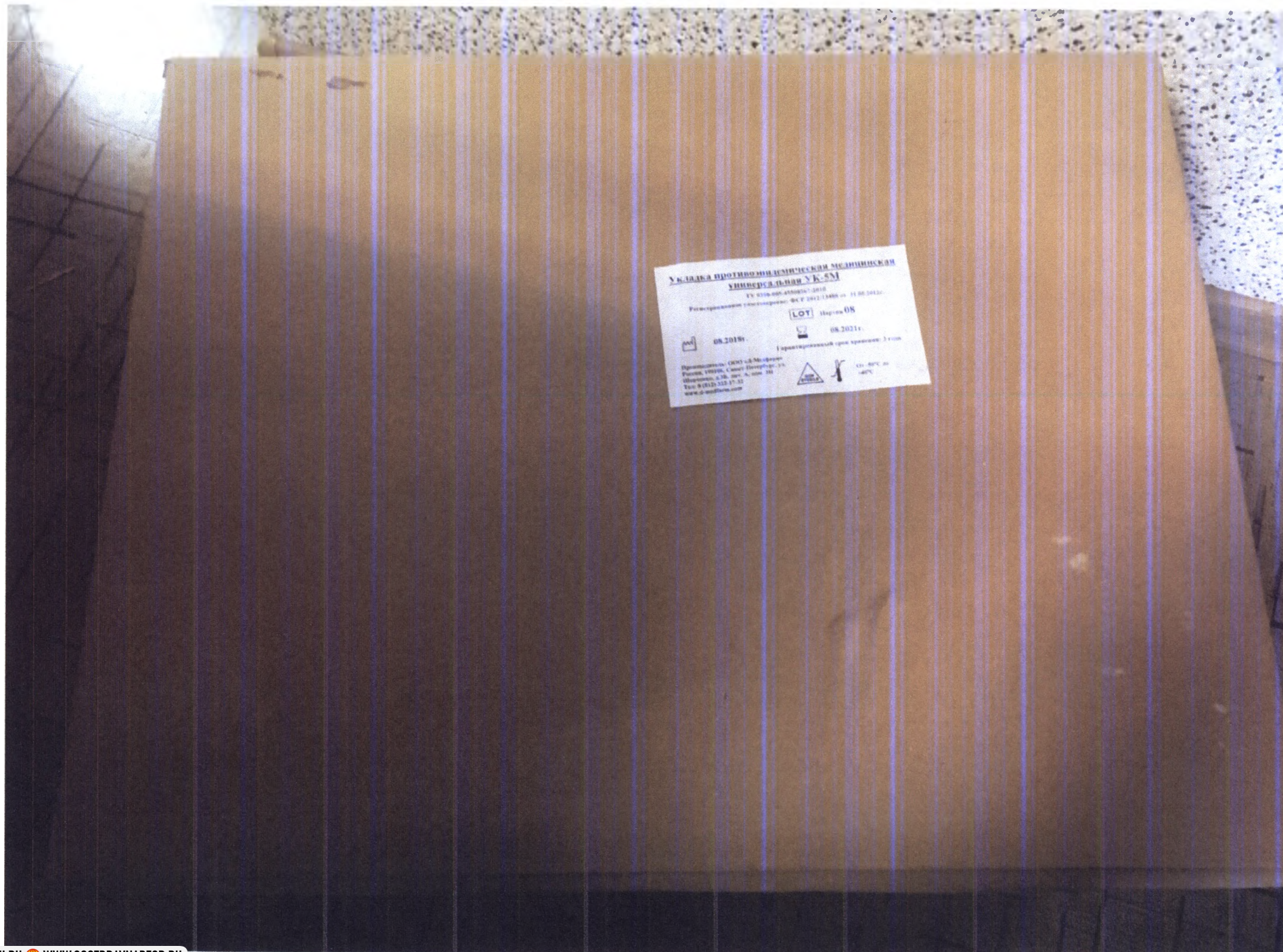

Укладка противоэпидемическая медицинская универсальная УК-5М

ТУ 9398-005-45508262-2010

Регистрационное удостоверение: ФСР 2012/13488 от XX.XX.XXXXг.

СУМКА № _____

LOT

Партия _____



XX.XXXXг.



XX.XXXXг.

Гарантированный срок хранения: 3 года

Производитель: ООО «Д-Медфарм»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н
Тел: 8 (812) 322-17-32
www.d-medfarm.com



От -50°C до +40°C

Предметы для забора крови:
Вакуумная пробирка Na-цитрат 3,8%, 4 мл




Вакуумная пробирка К2 или К3 ЭДТА, 4 мл.




Вакуумная пробирка К2 или К3 ЭДТА, 4 мл.



Игла для забора проб крови

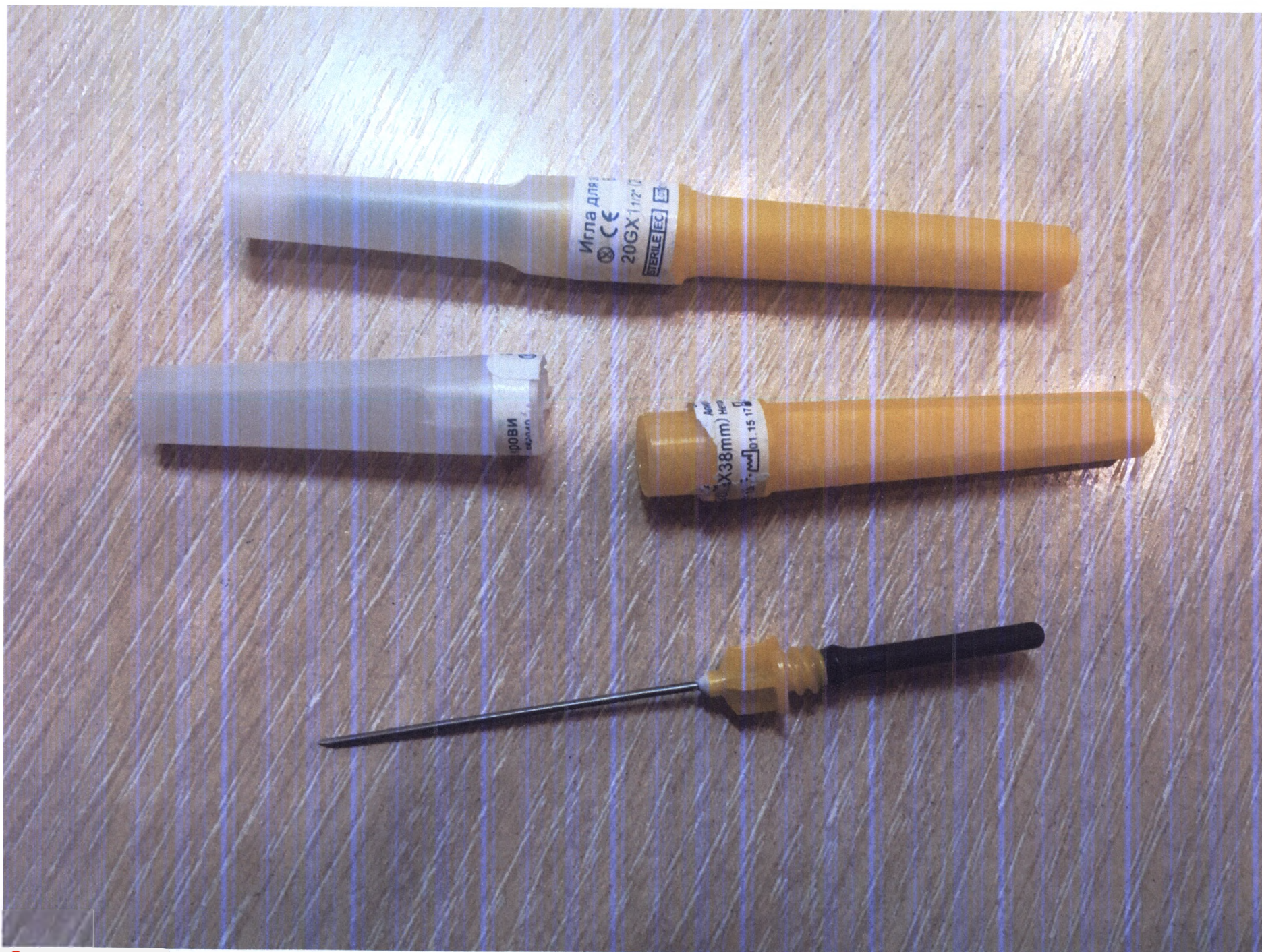


Держатель механический для вакуумных систем, одноразовый

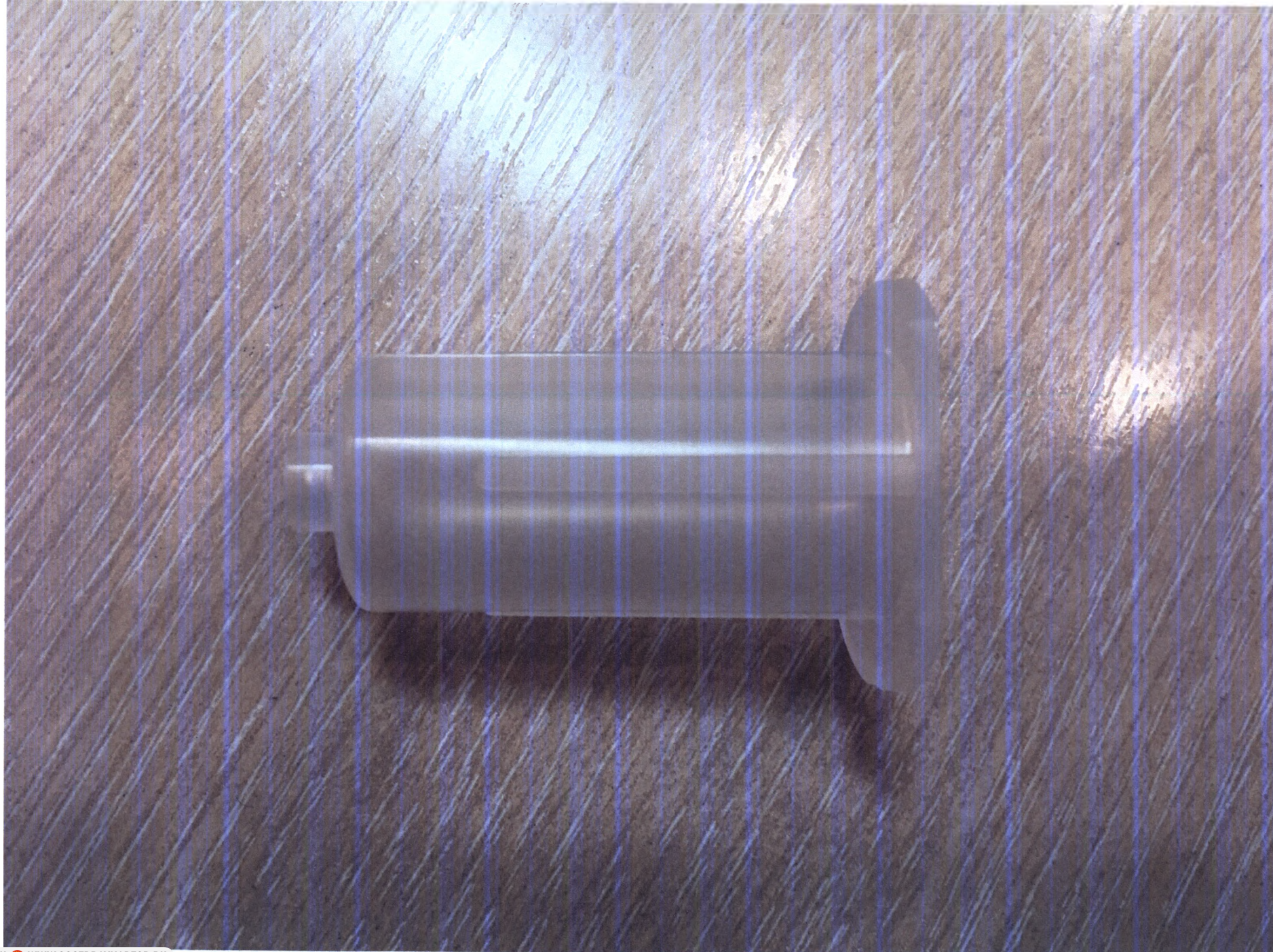


Скарификатор-копье, однократного применения, стерильное




Салфетка медицинская проспиртованная

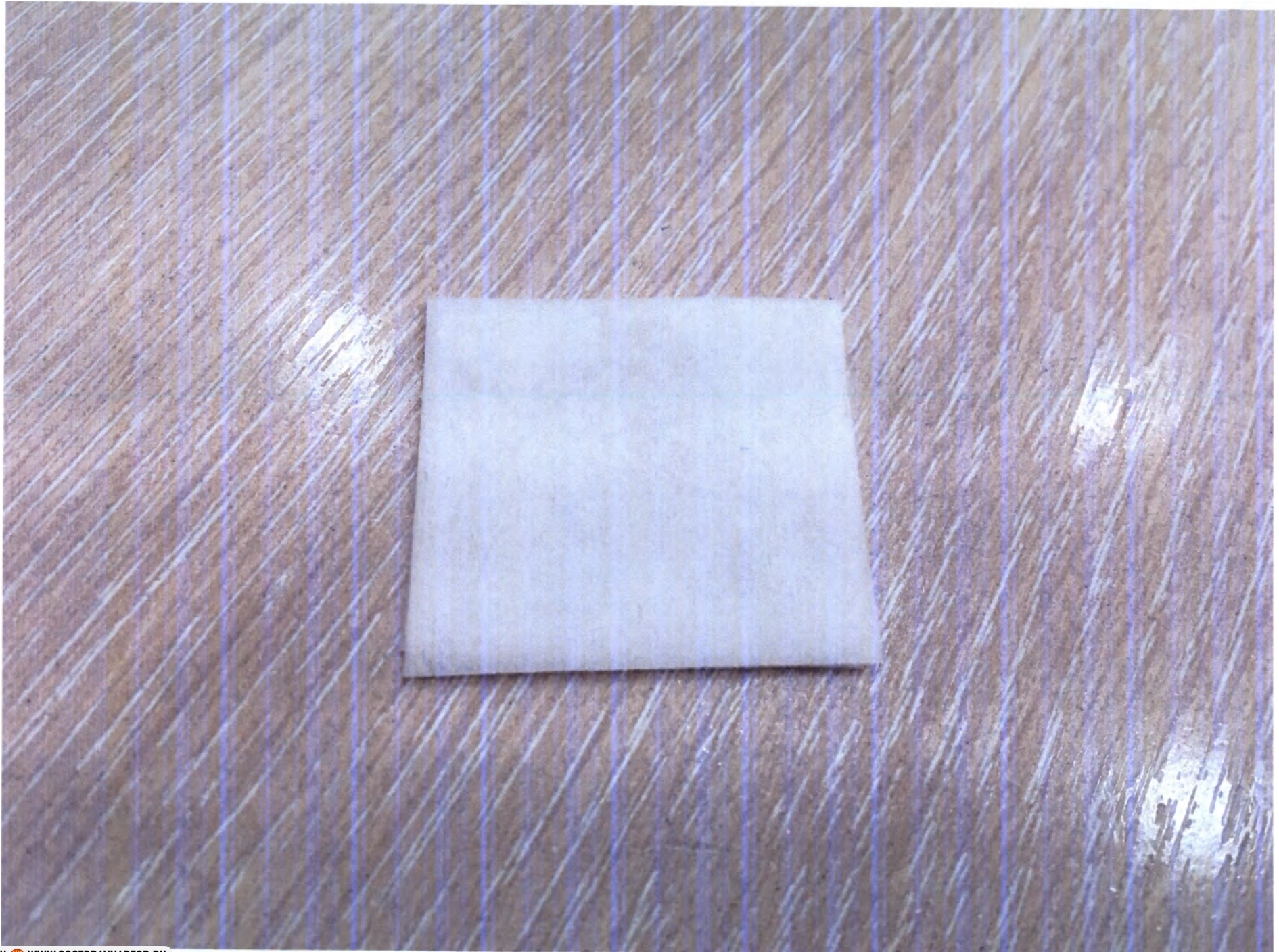

Жгут кровоостанавливающий

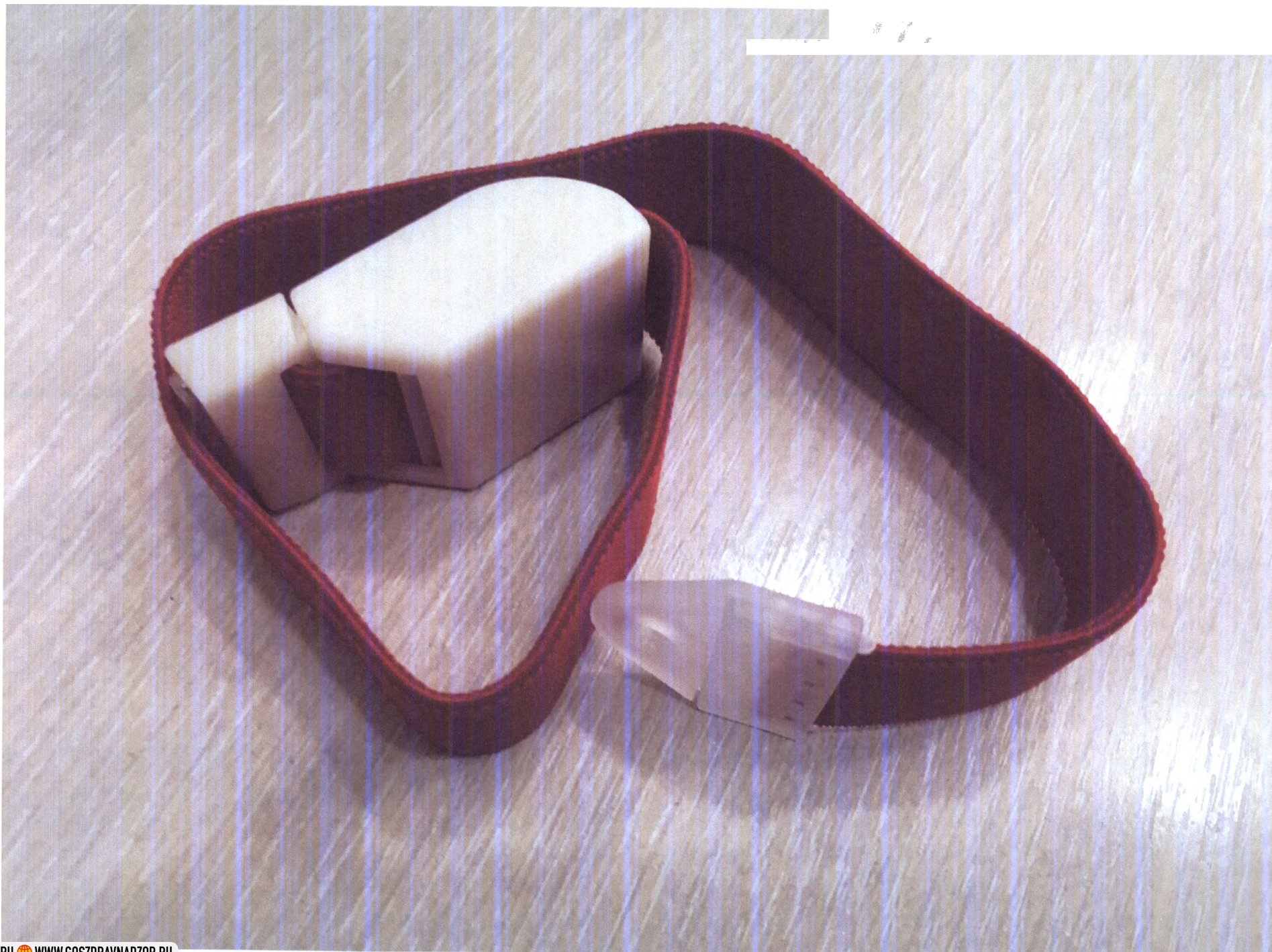

Бинт медицинский марлевый стерильный

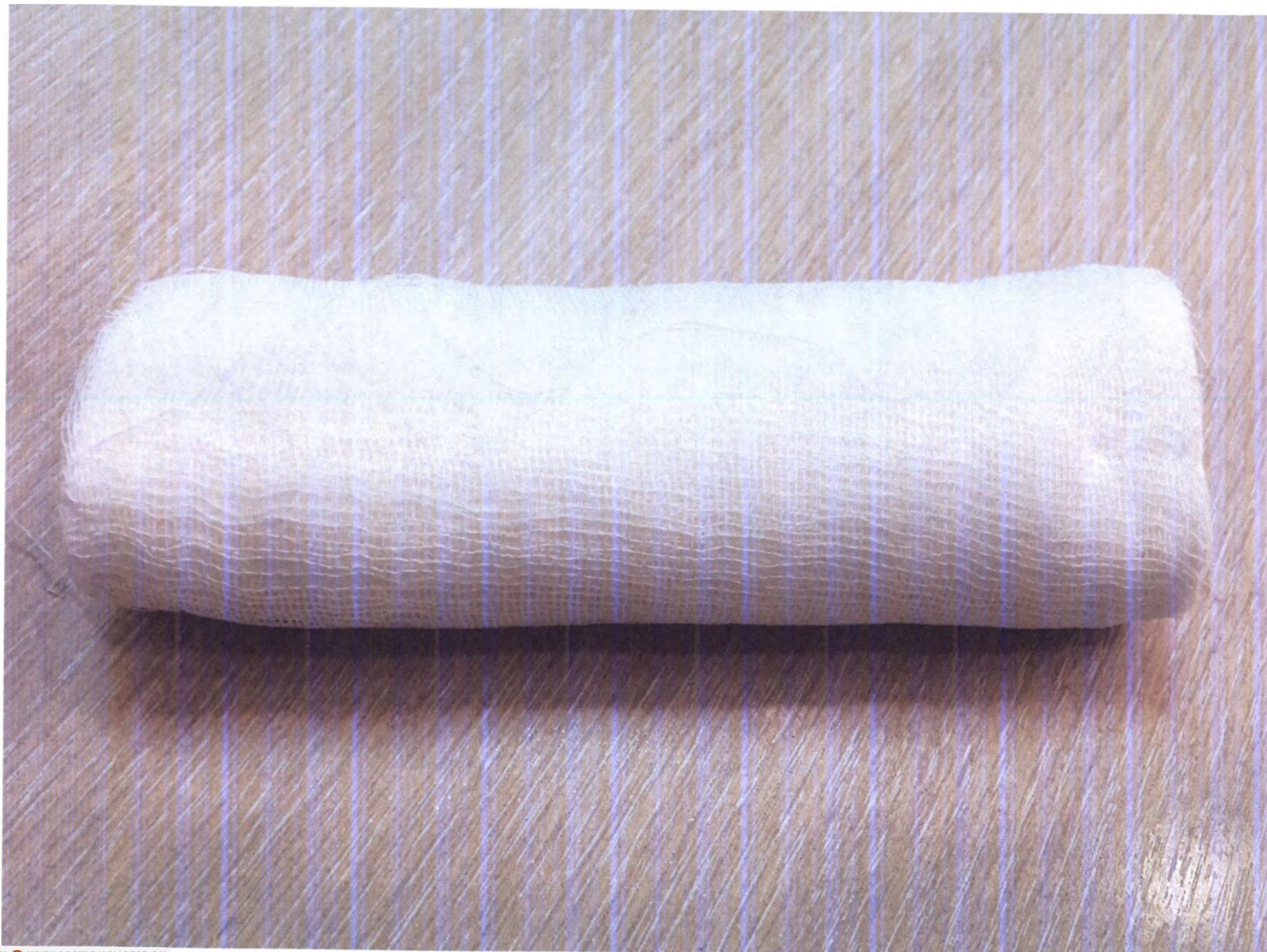


Салфетка марлевая медицинская, стерильная



Лейкопластырь




Шприц инъекционный иглой (до 20 мл) медицинский одноразового применения, стерильный

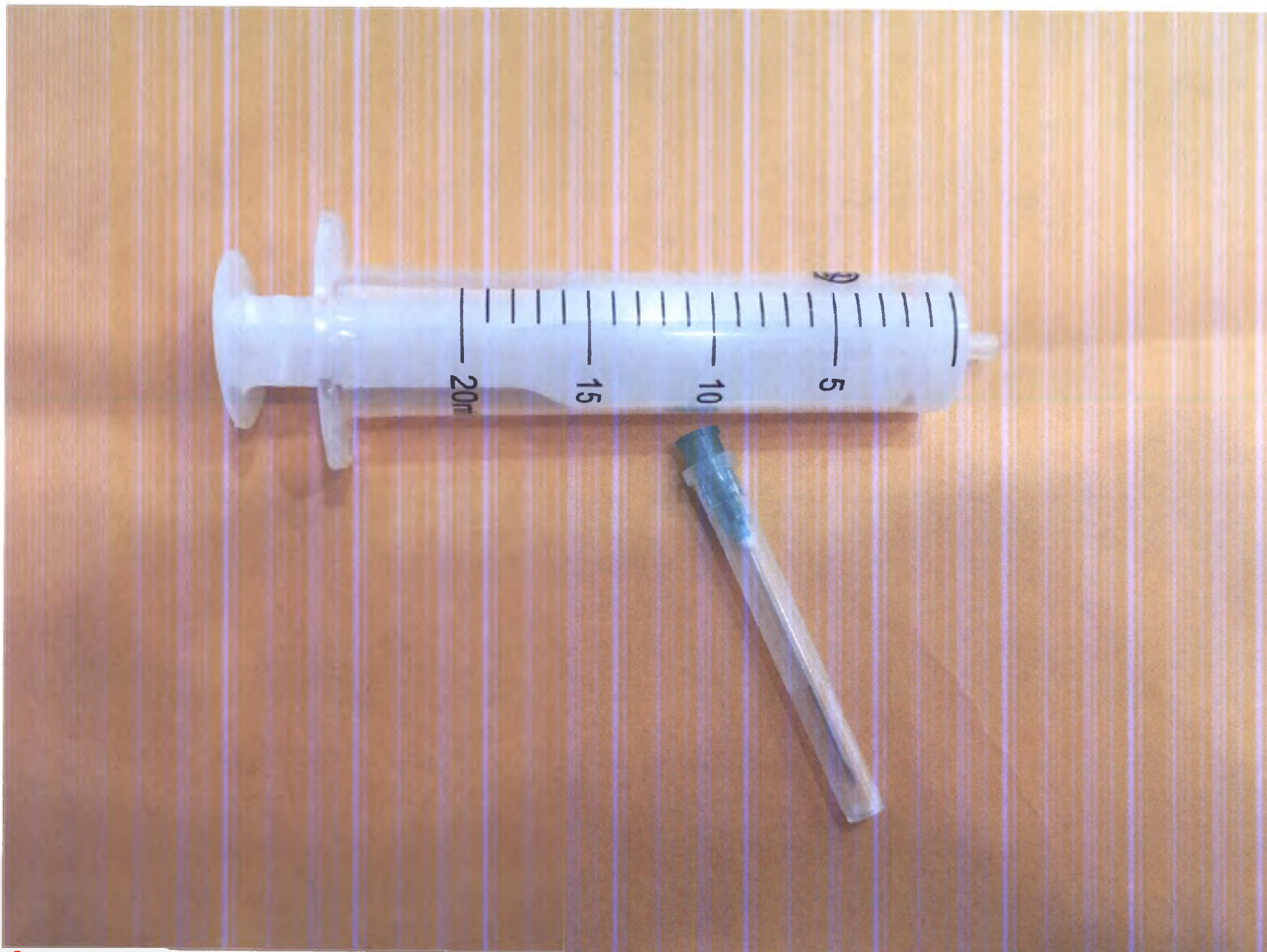


Предметы для забора биологического материала:


Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб (дерево/хлопок, стерильный, дл. 15см.)

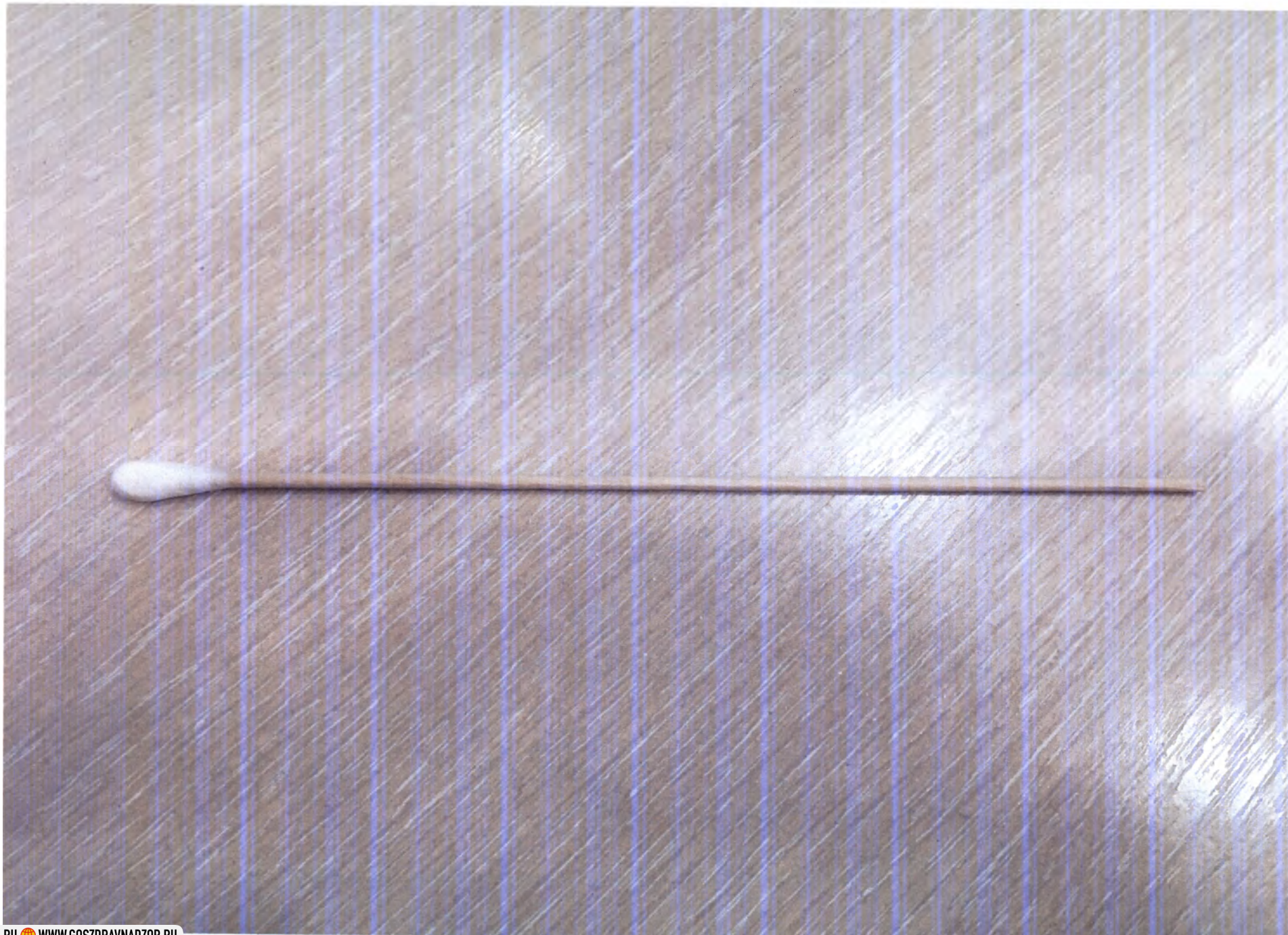

Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб, в комплекте с пустой пробиркой (дерево/хлопок, стерильный)

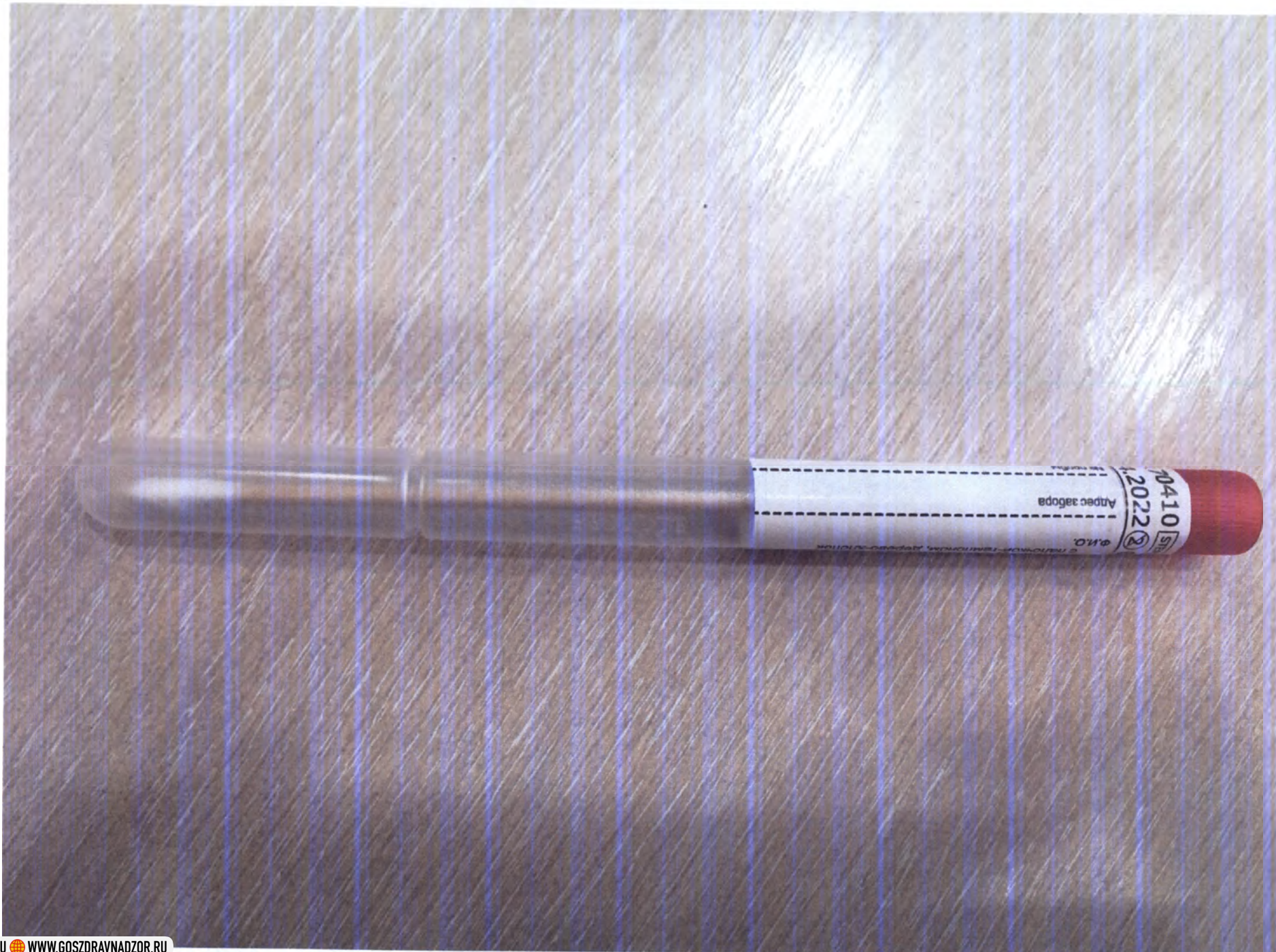


Пинцет (не менее 150 мм) одноразового применения, стерильный

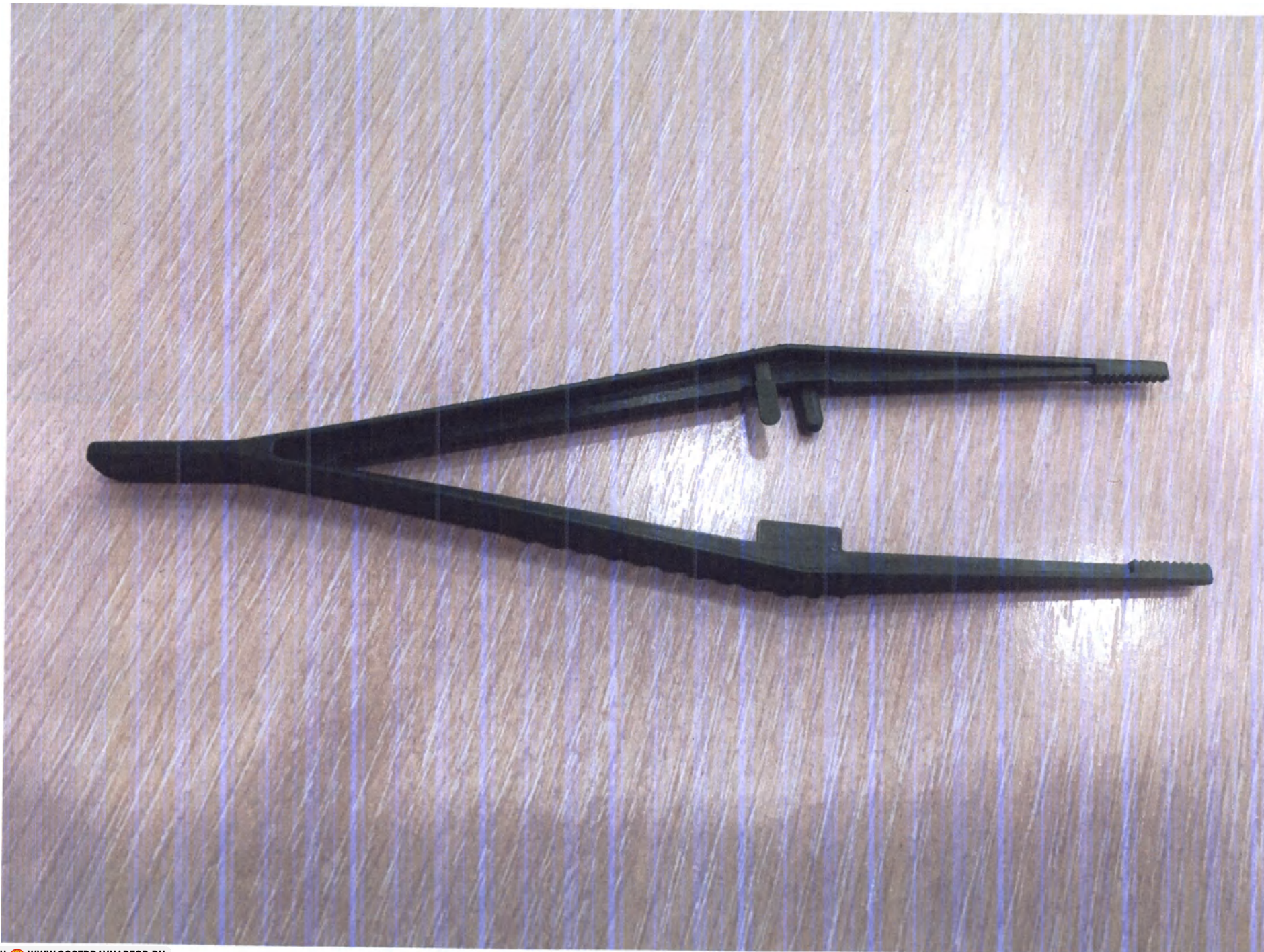


Шпатель медицинский деревянный, одноразовый, стерильный




Катетер урологический женский для одноразового использования, стерильный

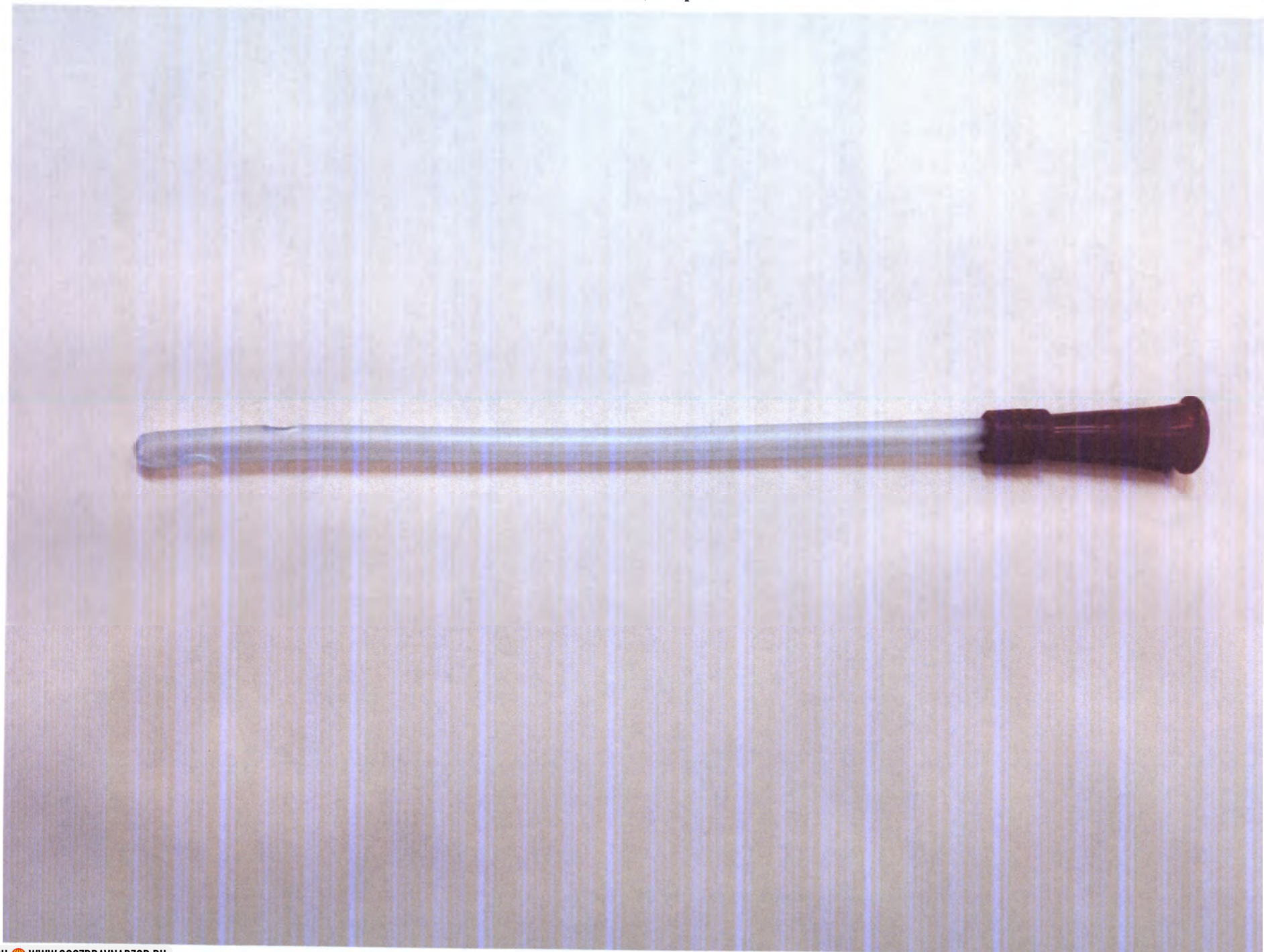


Катетер урологический мужской для одноразового использования, стерильный

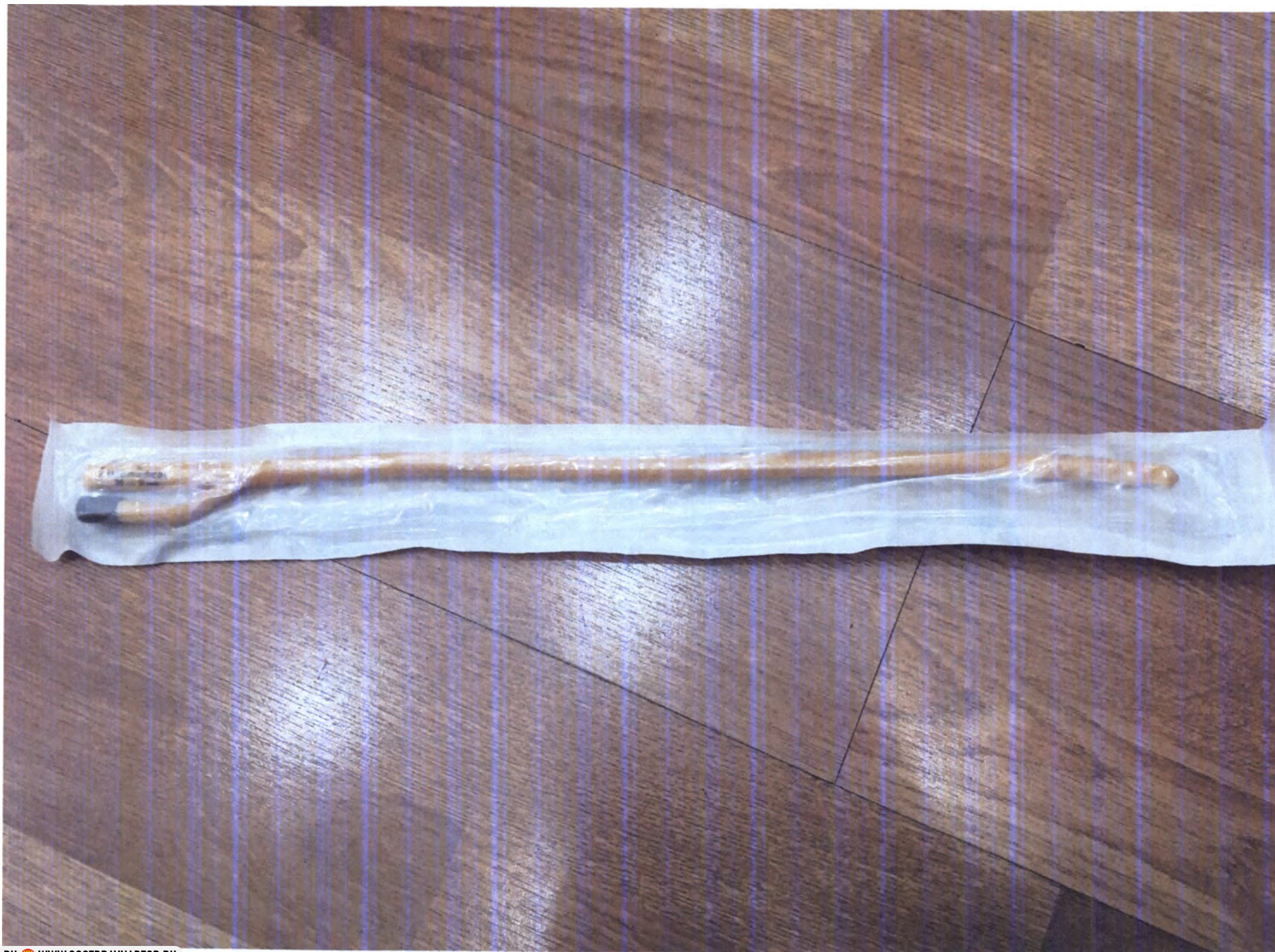


Вата медицинская гигроскопическая

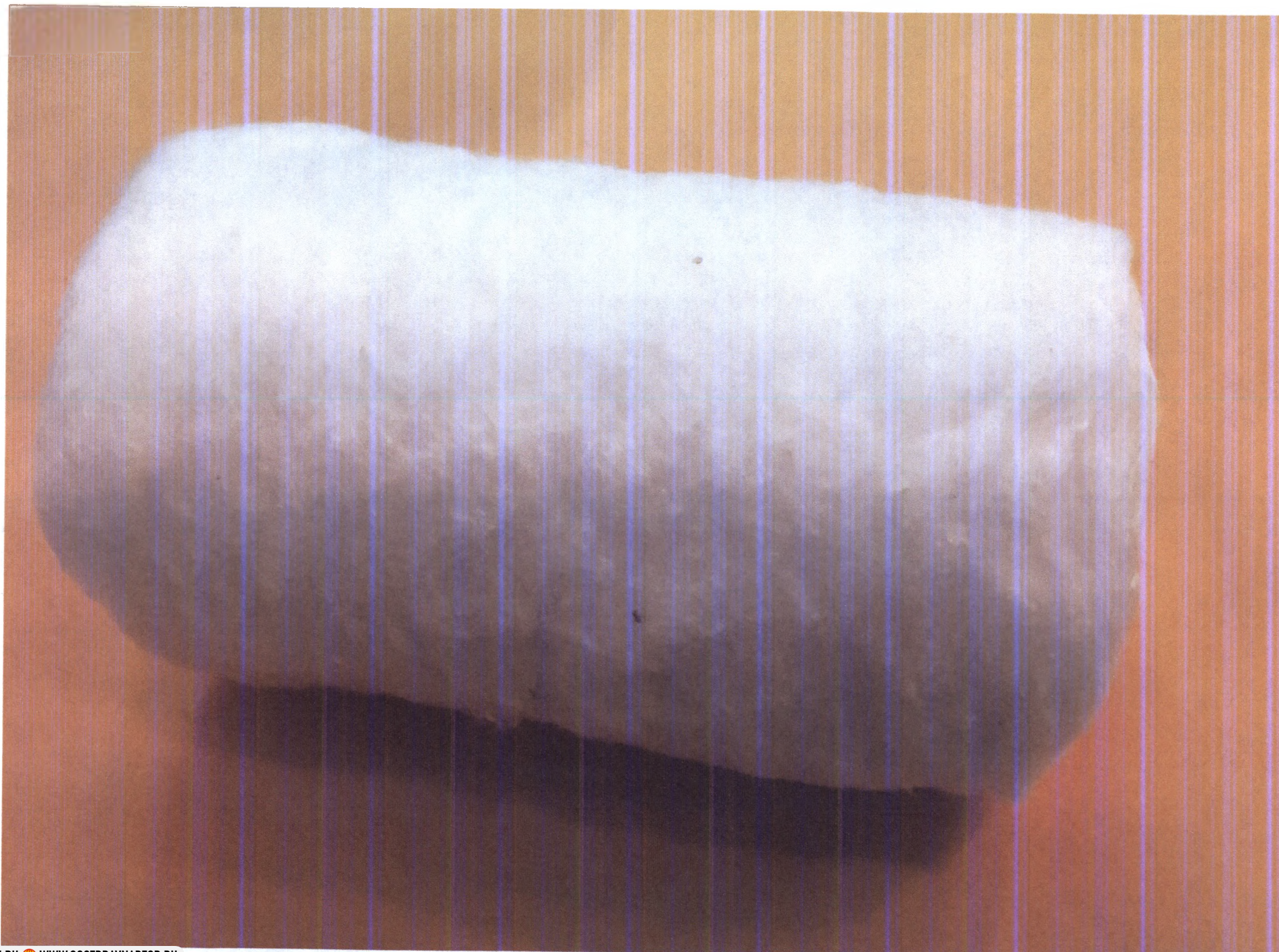


**Предметы для забора, хранения и транспортировки проб биологического материала:
Контейнер полипропиленовый с завинчивающейся крышкой, стерильный емкостью не менее 100 мл.**

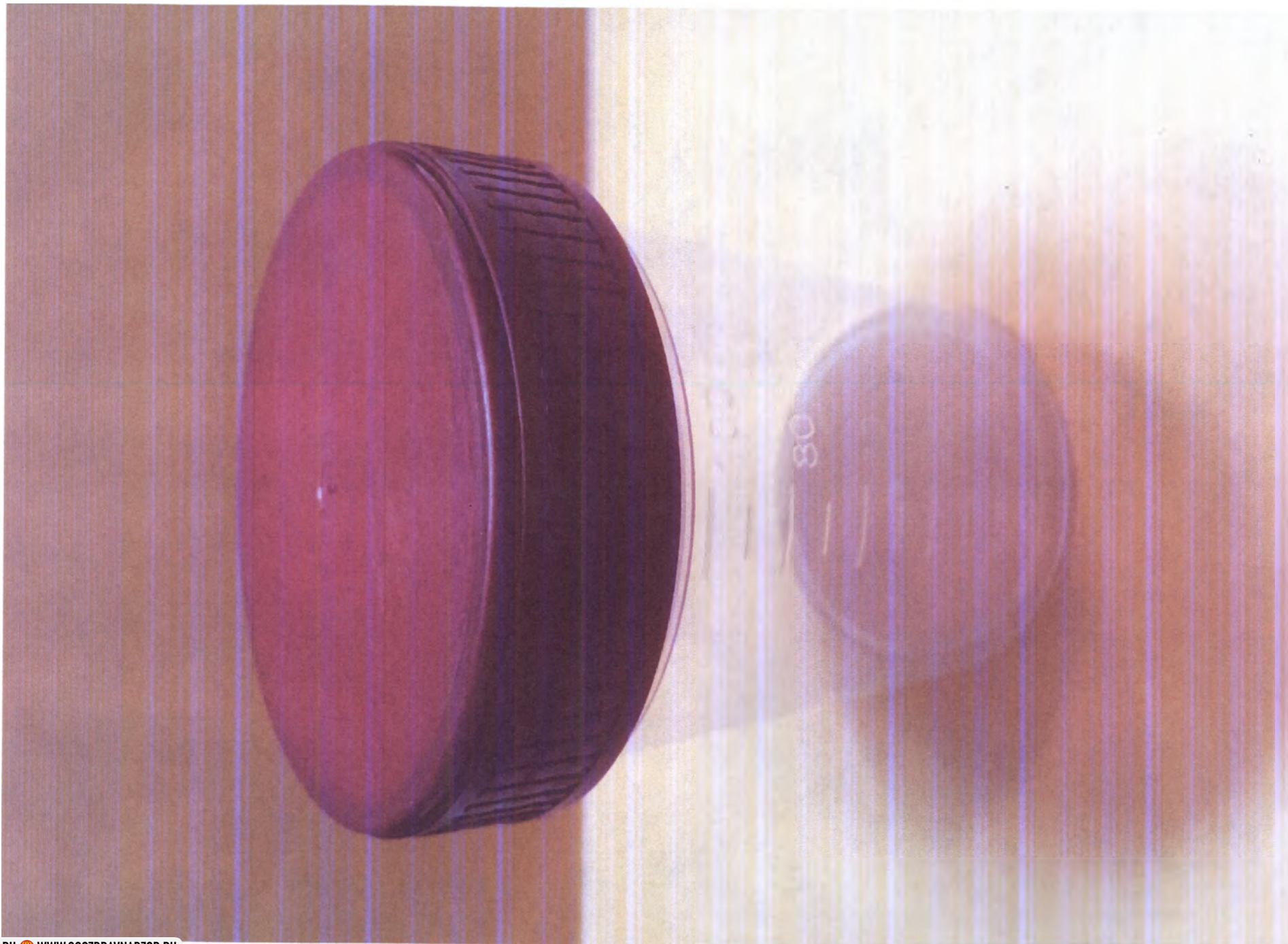


Контейнер полипропиленовый с завинчивающейся крышкой с лопаткой, стерильный емкостью не менее 50 мл.

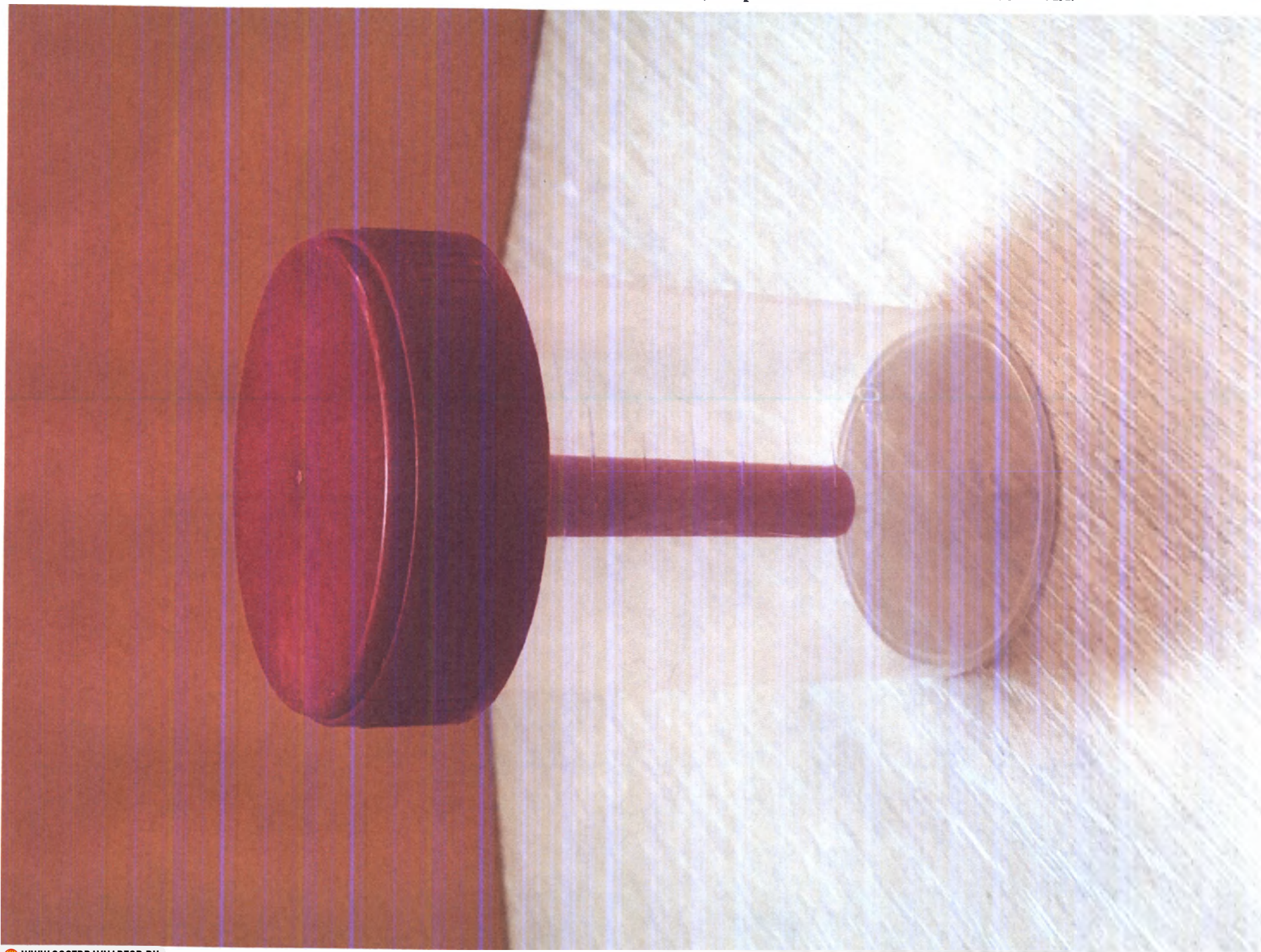

Контейнер лабораторный для проб с завинчивающейся крышкой, стерильный, емкостью не менее 50 мл.

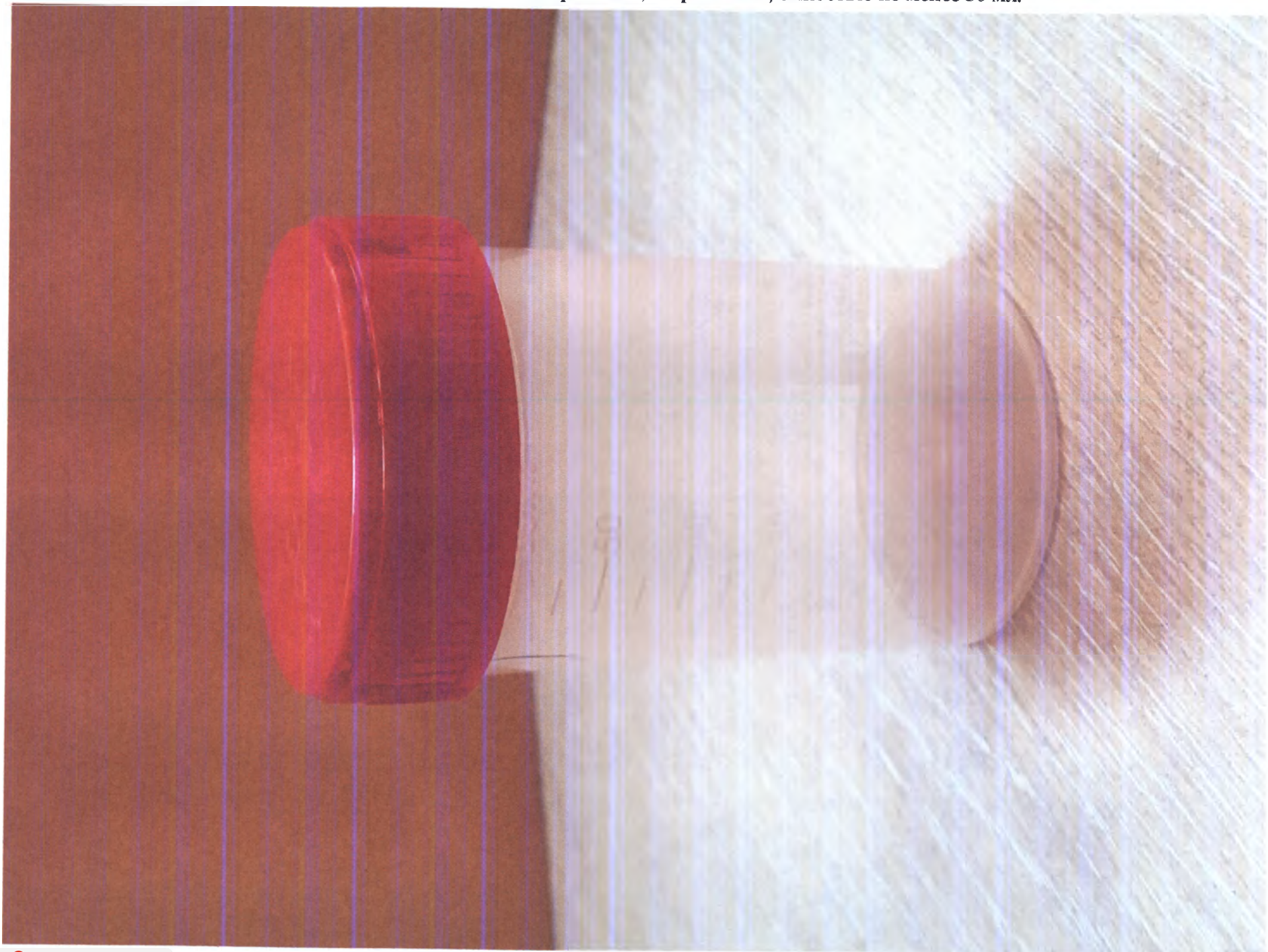


Пробирка микроцентрифужная 1,5 мл. типа «Эппендорф», нестерильная

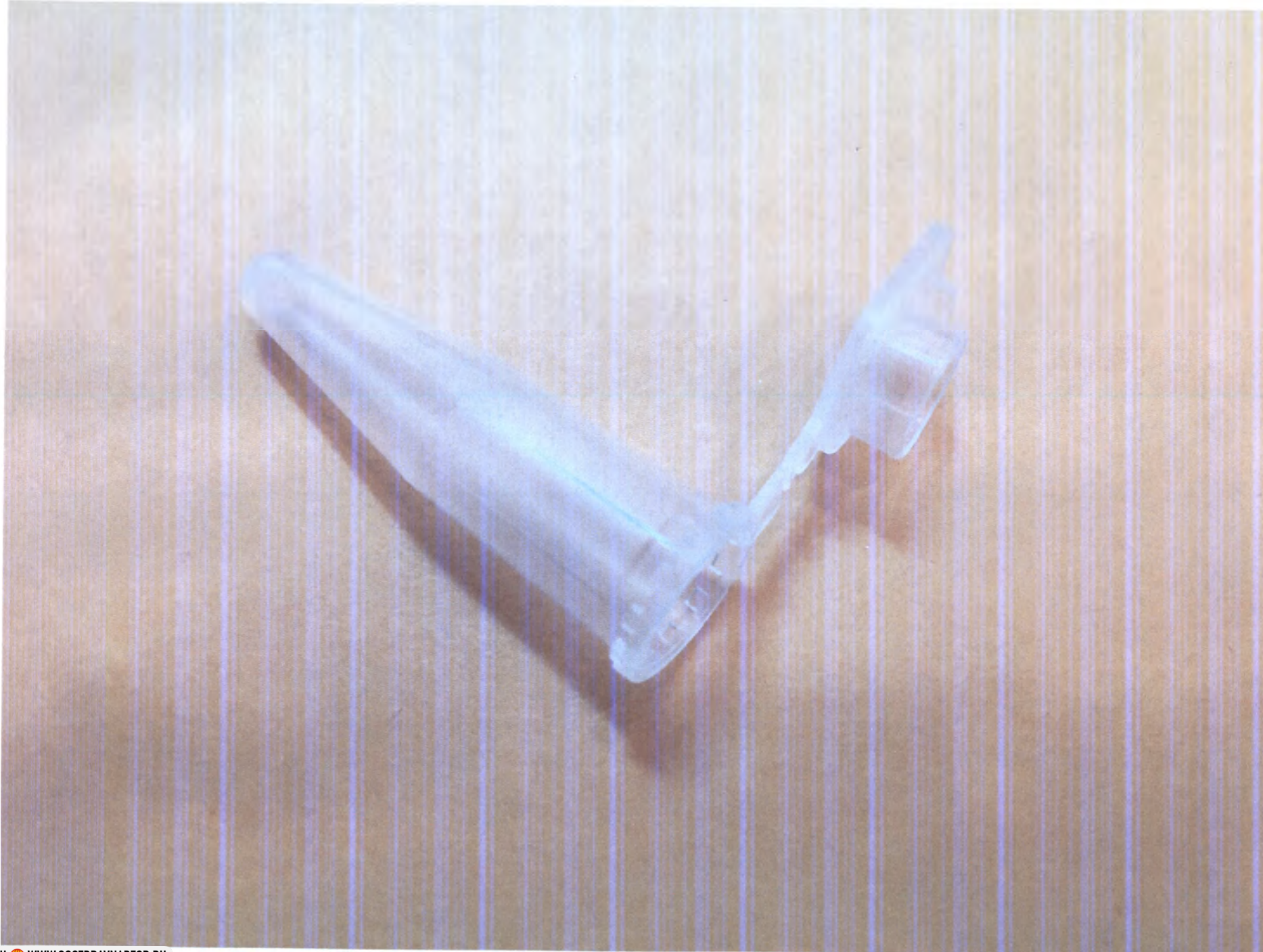


Криопробирка с давлением, закручивающейся крышкой и юбкой устойчивости, нестерильная 1,8 мл



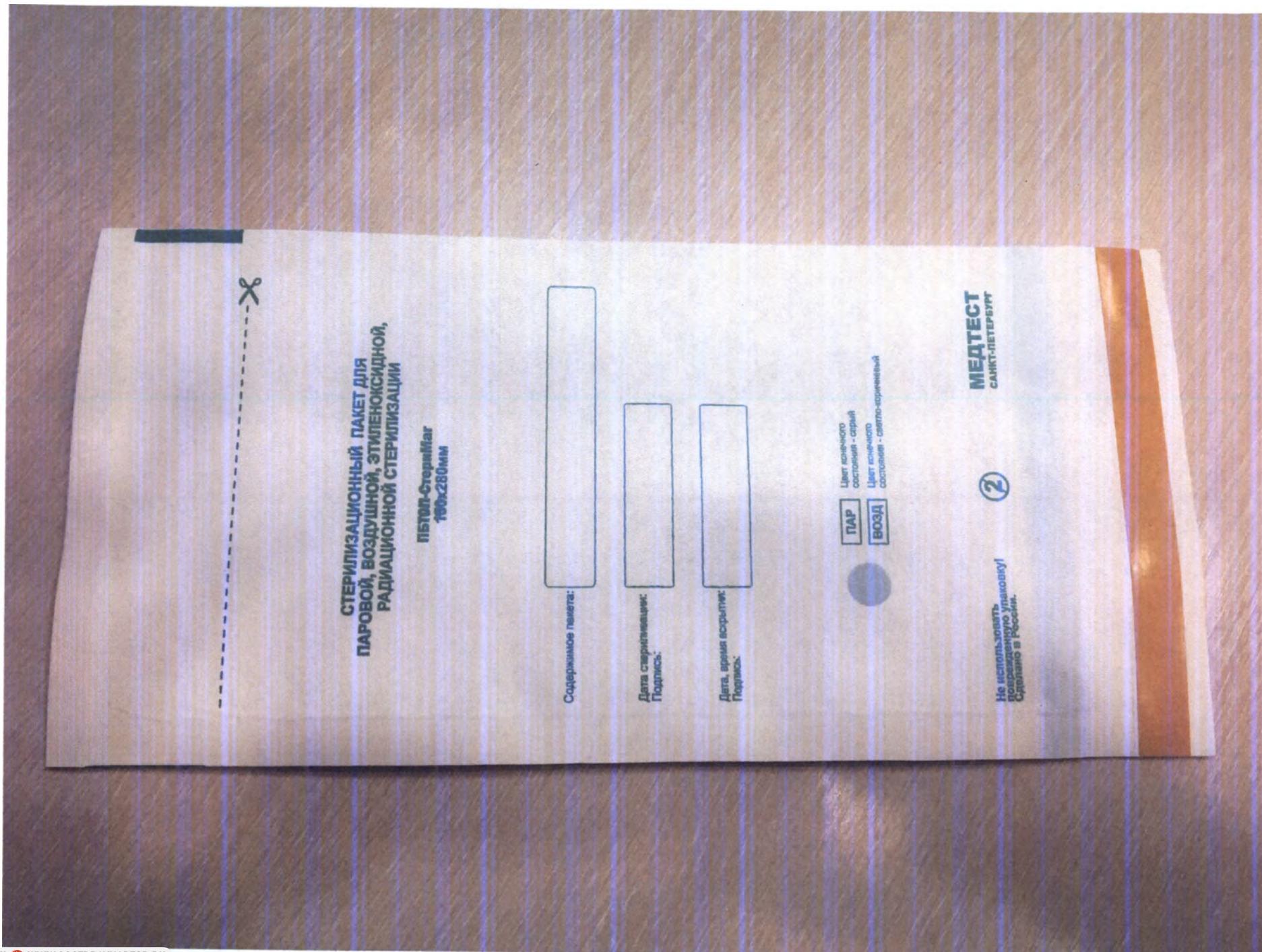

Пакет для автоклавирования на 3 л (Крафт-пакеты)

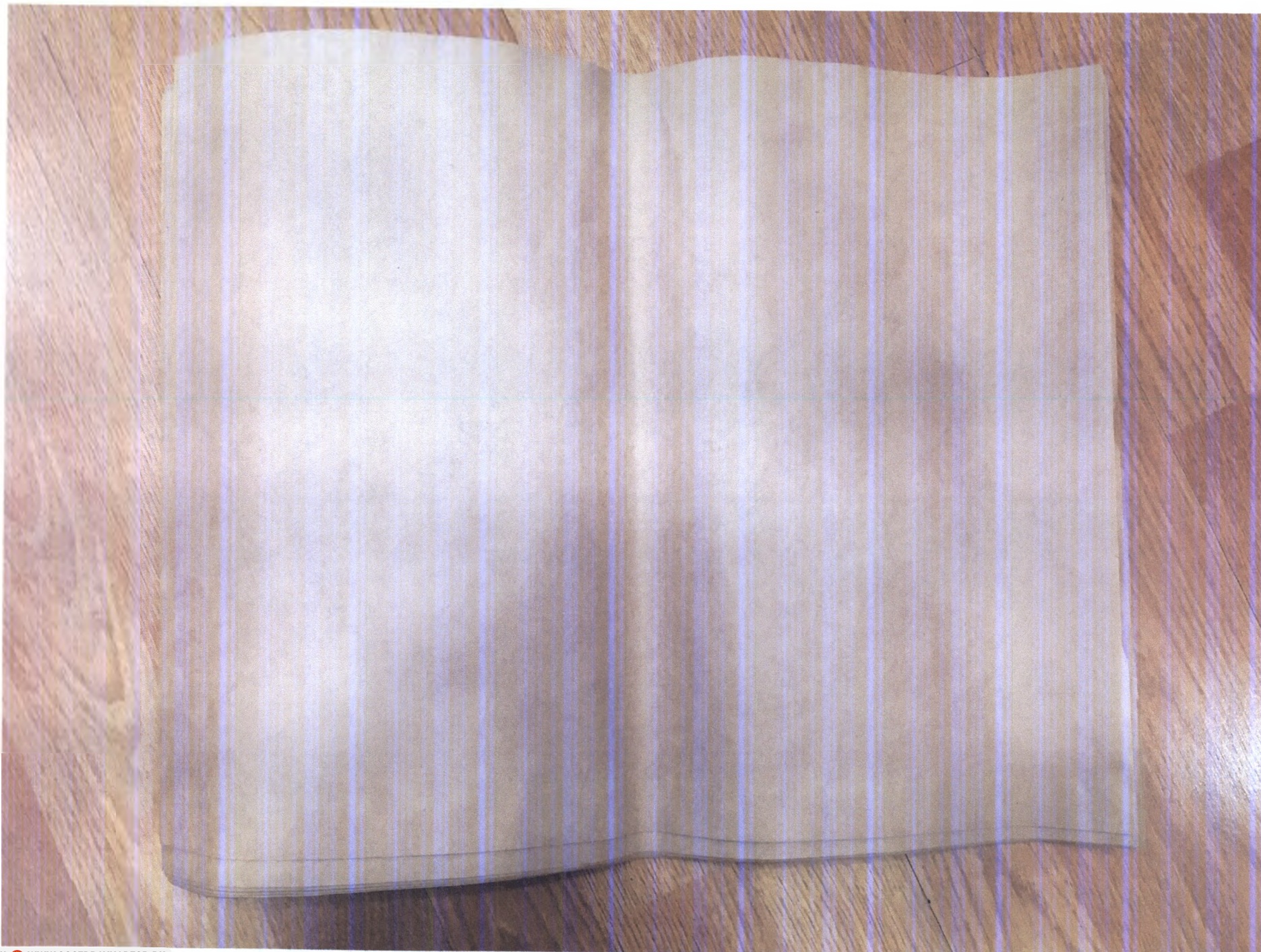


Полимерный пакет "Вихрь" для отбора проб и хранения образцов, стерильный



Медицинские ватные шарики, нестерильные




Контейнер для утилизации отходов и игл

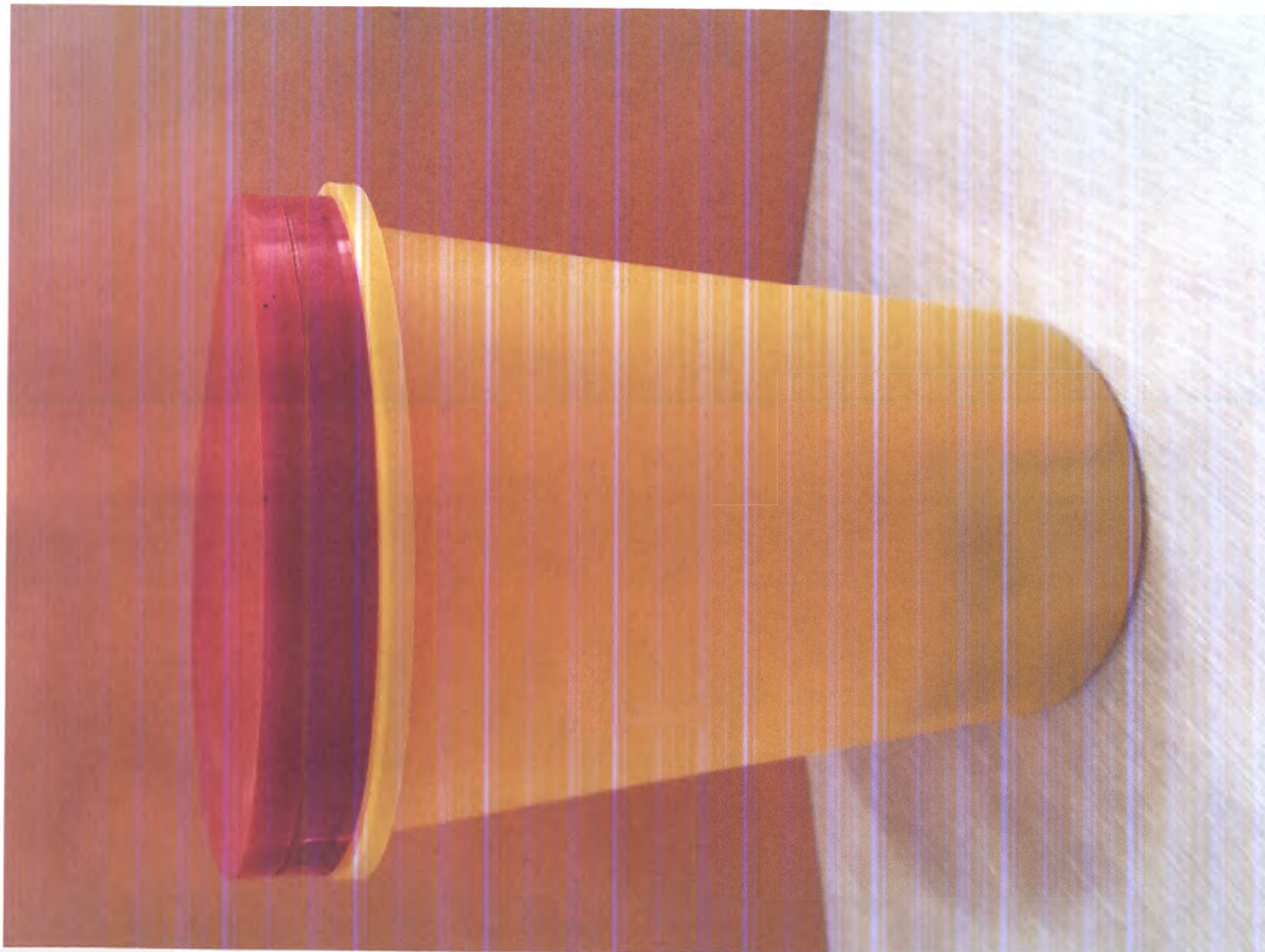


Бутылка цилиндрическая с завинчивающейся крышкой, неградуированная, 250 мл




Пинцет анатомический не менее 250мм.

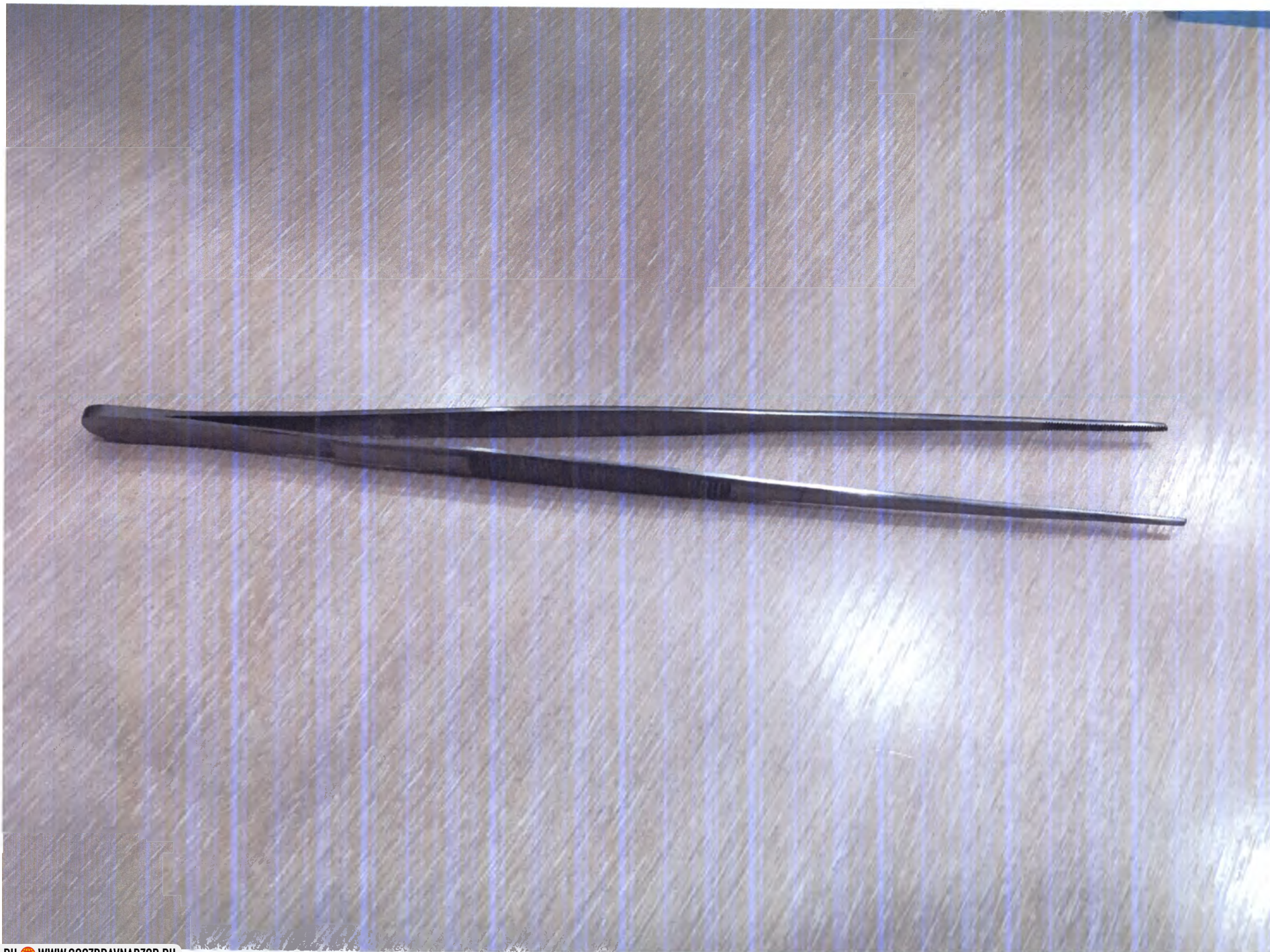

Пинцет хирургический не менее 140 мм.

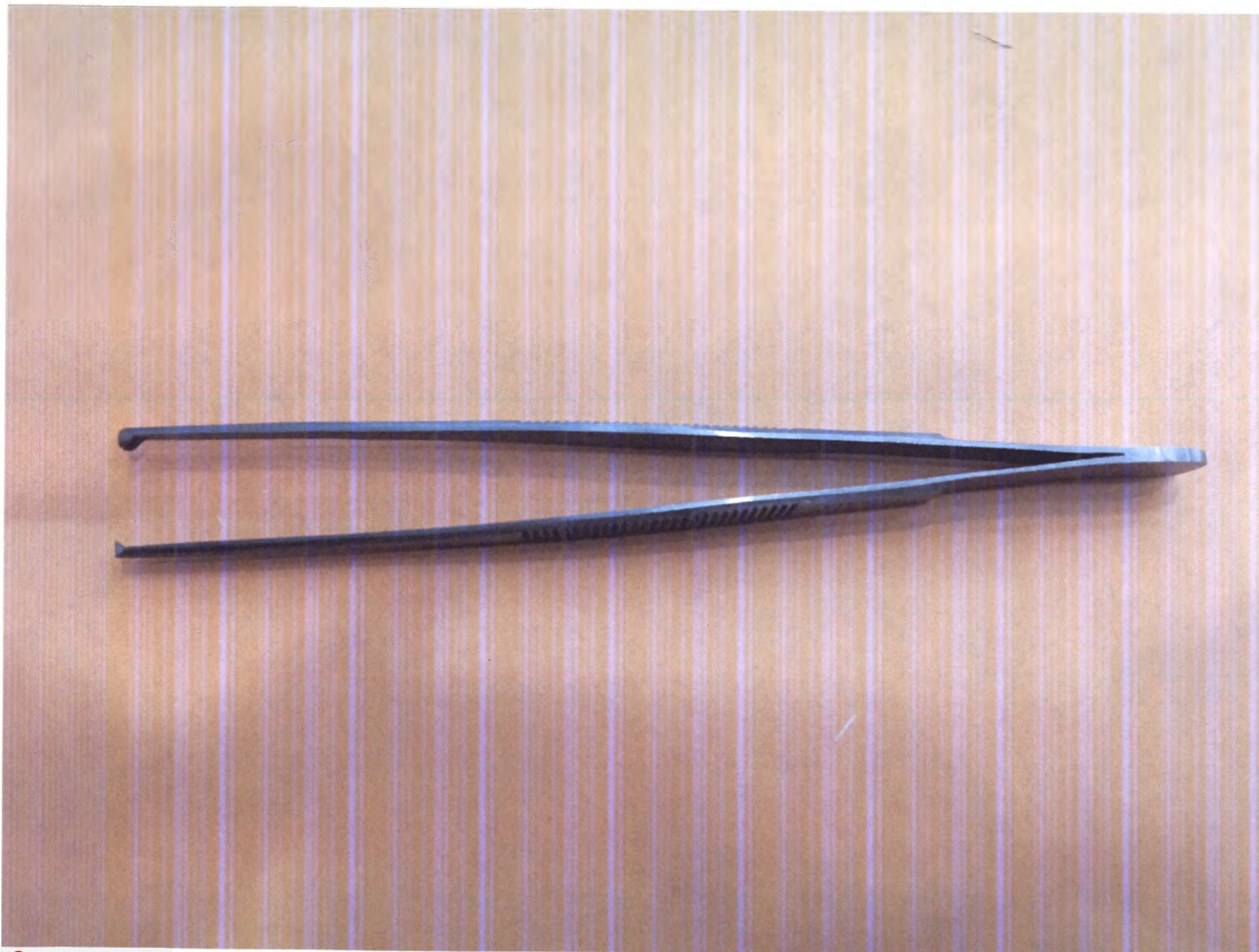

Скальпель хирургический острый не менее 150 мм.

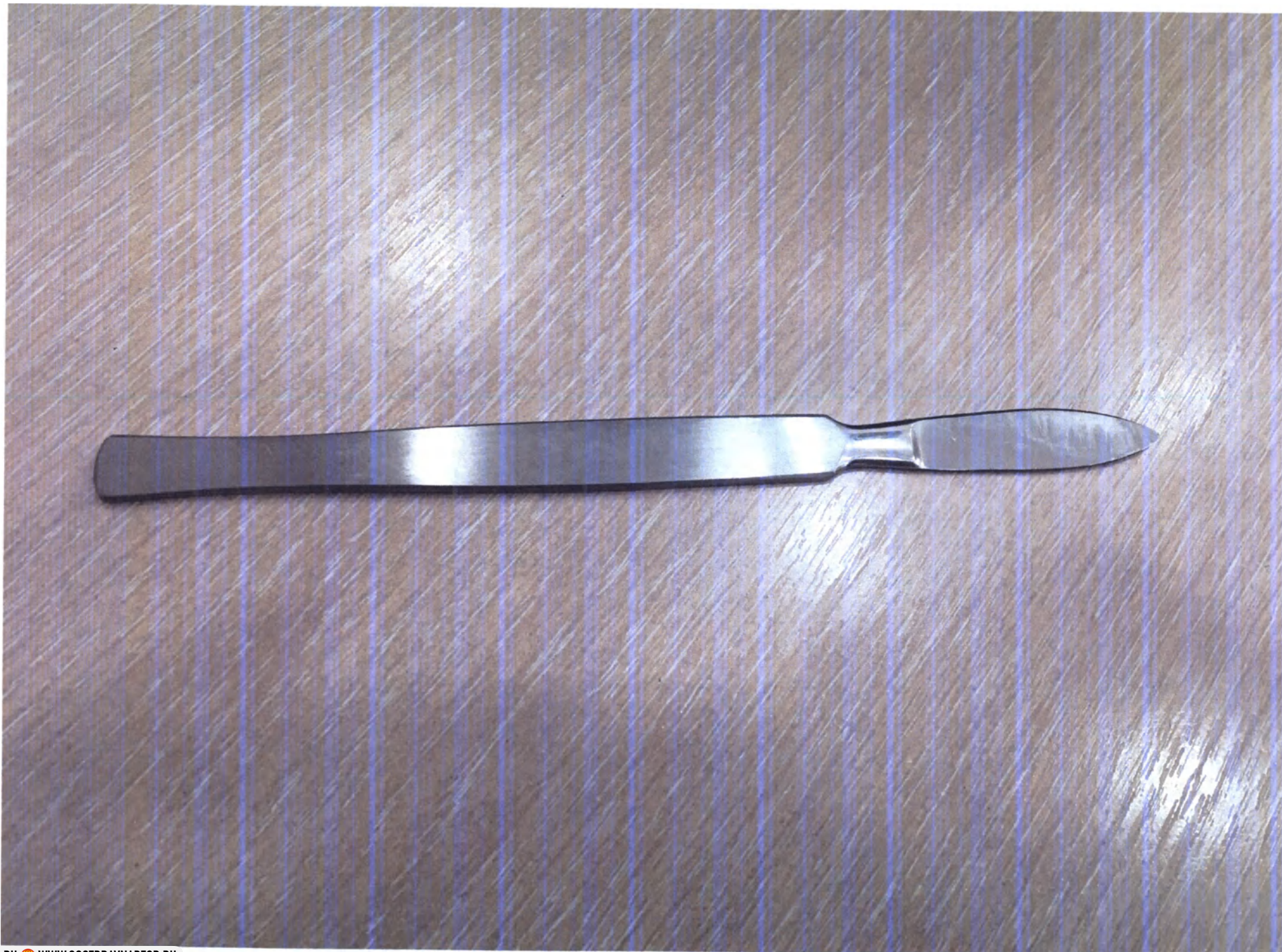


Ножницы прямые с 2-острыми концами не менее 140 мм.




Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОФ-1-200, объем 200 мкл.




Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОП-1-1000-1000, объем 1-10 мл.

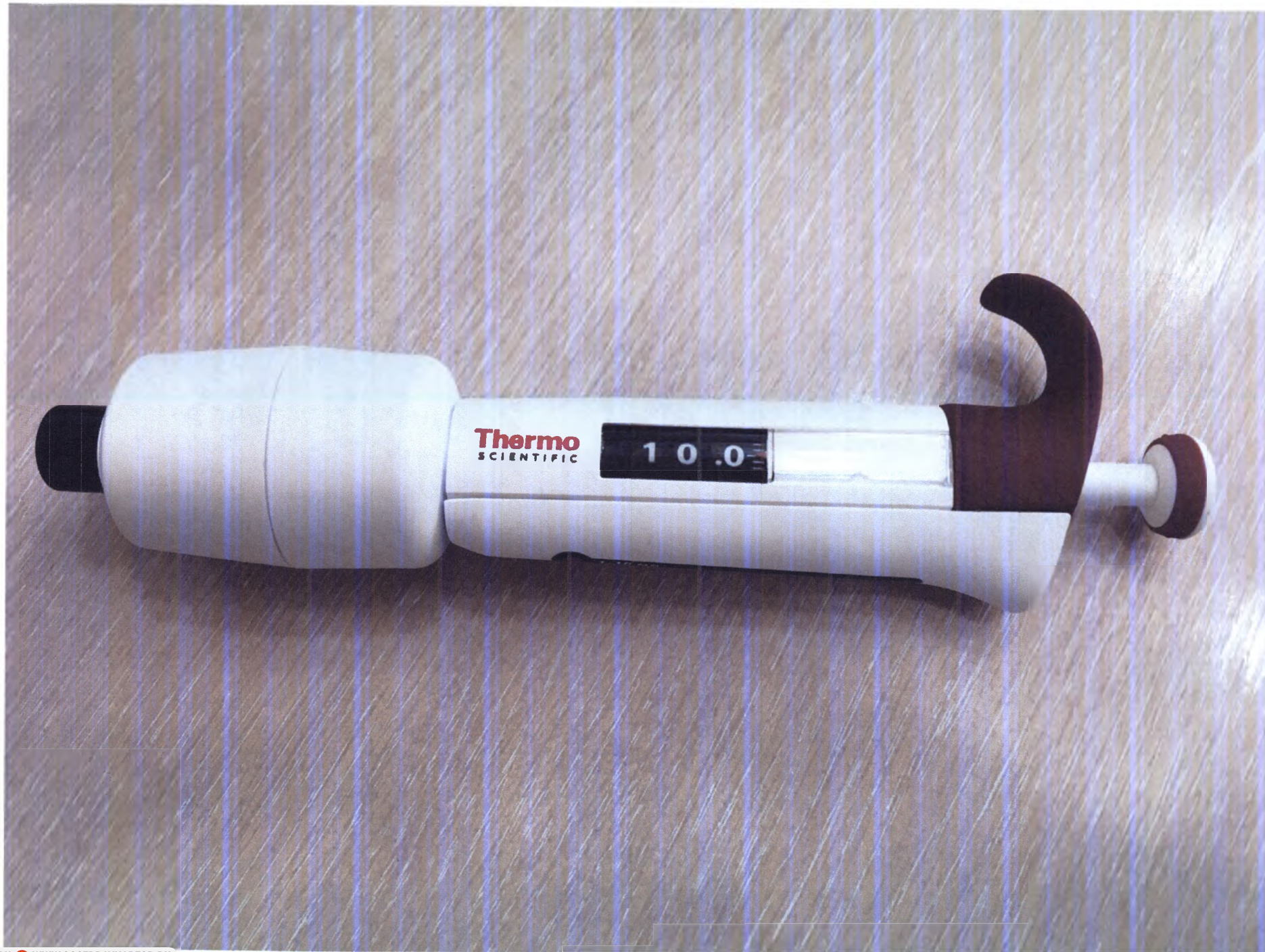


Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным 0,5-25мкл.

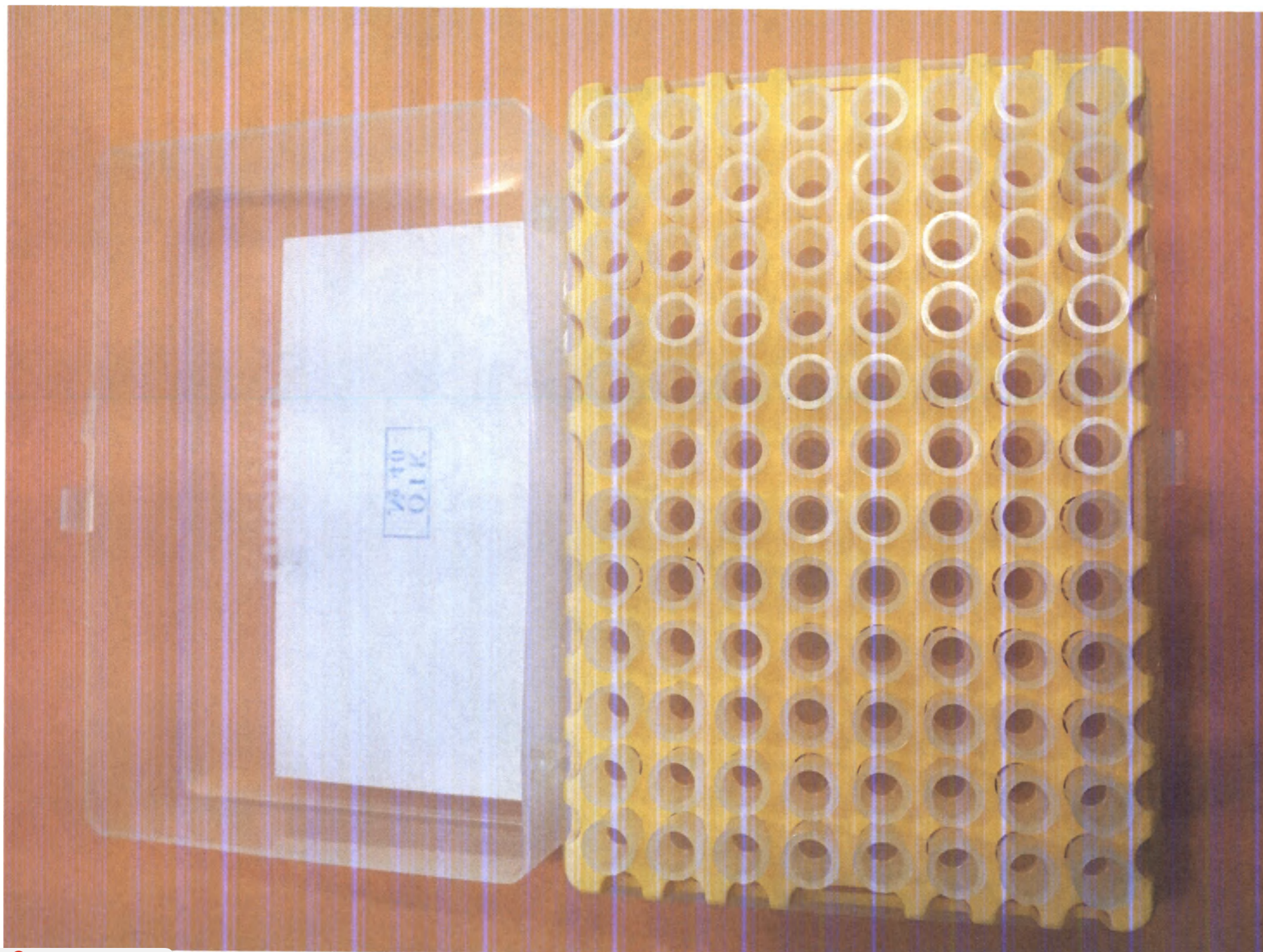

Наконечник полимерный к дозаторам пипеточным 1-10мл., одноразового применения

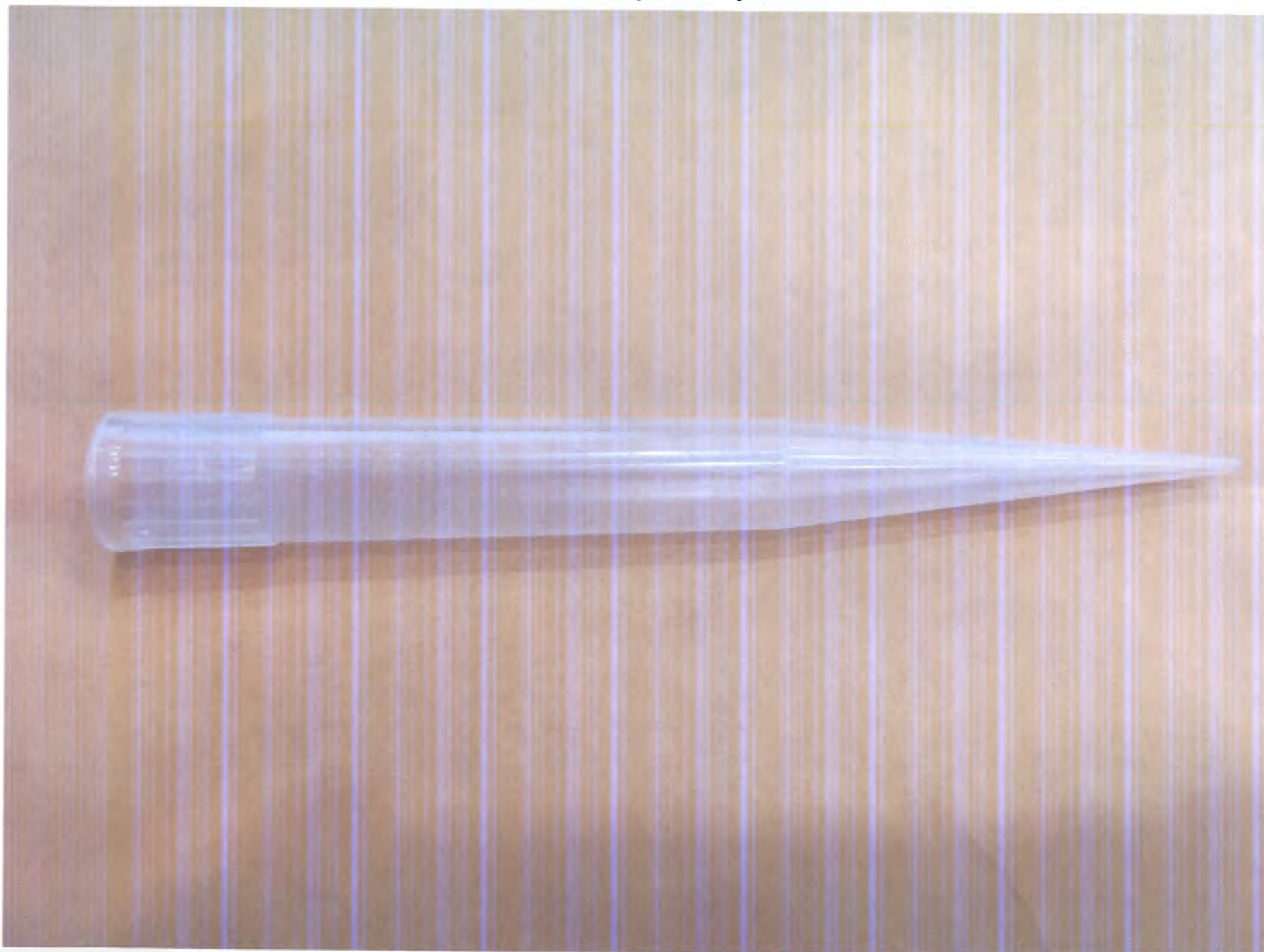


Штатив - бокс для криопробирок на 2 мл.

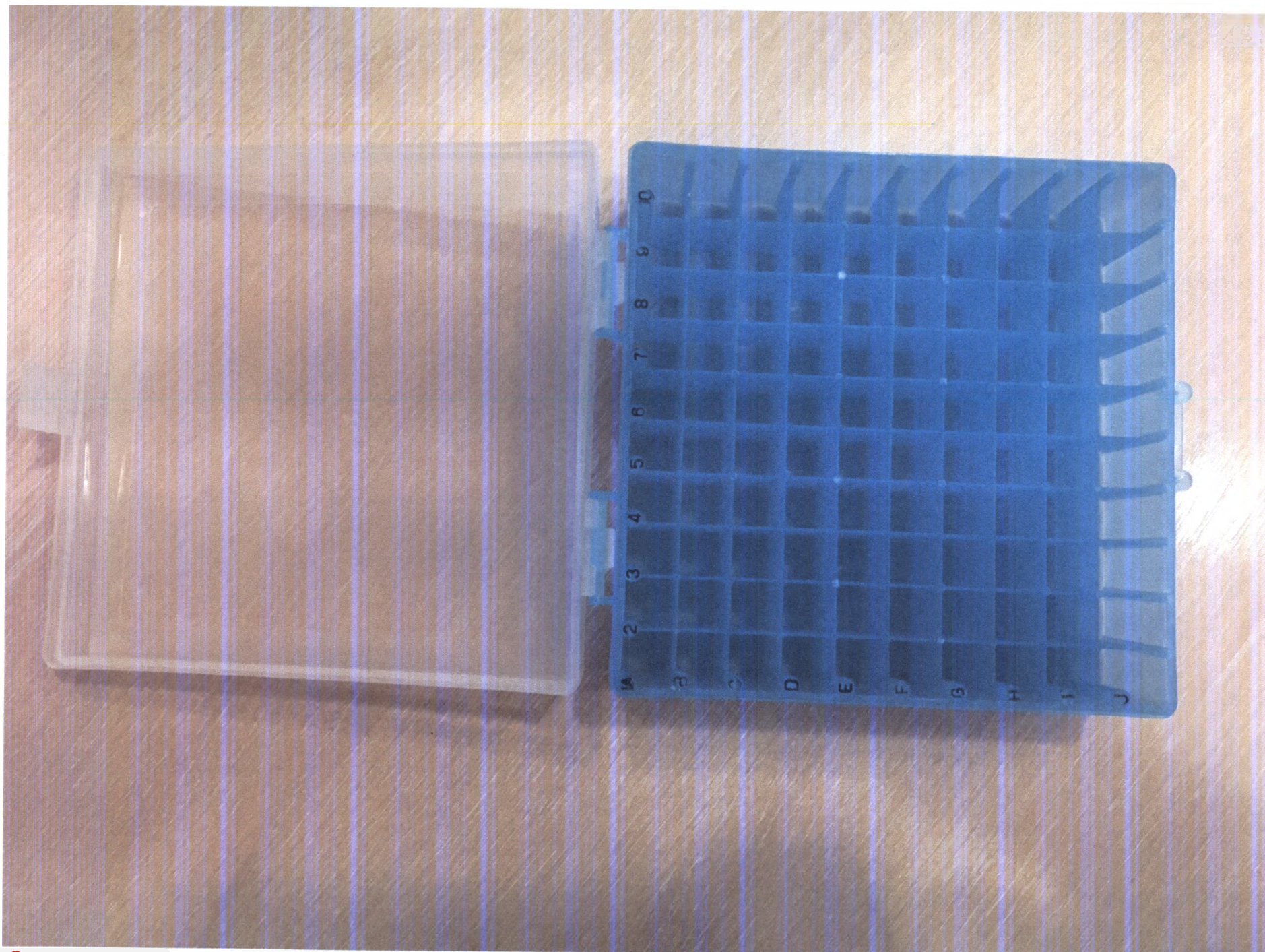


Штатив - бокс для пробирок Эппендорфа на 1,5 м.



Стекло предметное, со шлифованными краями

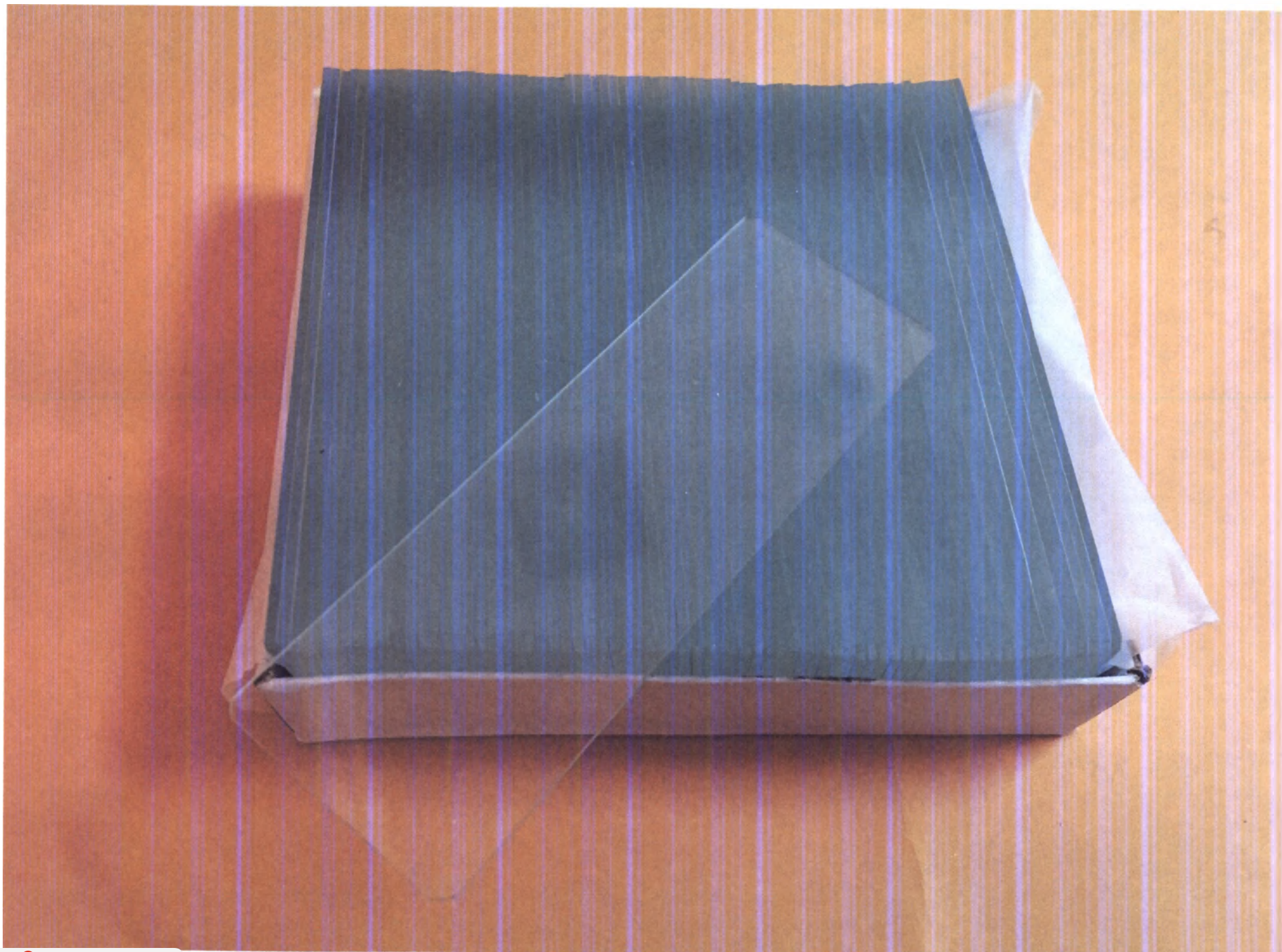

Стекло покрывное

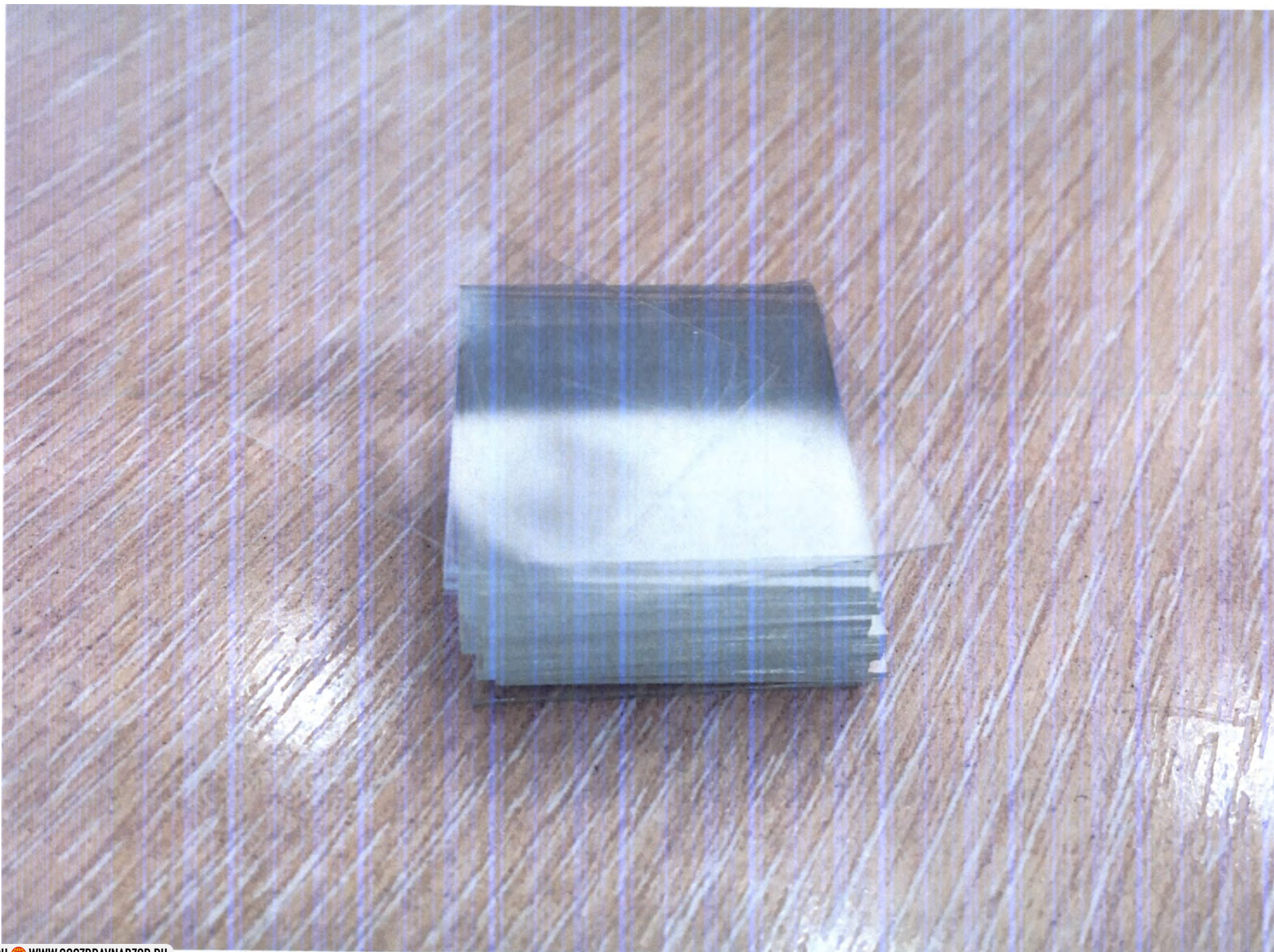

Спиртовка



Клеенка медицинская подкладная с ПВХ покрытием



Средства индивидуальной защиты:

Защитный комбинезон с капюшоном и эластичными манжетами на штанинах и рукавах, а так же резинкой по краю капюшона и на талии



Фильтрующий респиратор



Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса, неопудренные




Бахилы хирургические "Стандарт"



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»

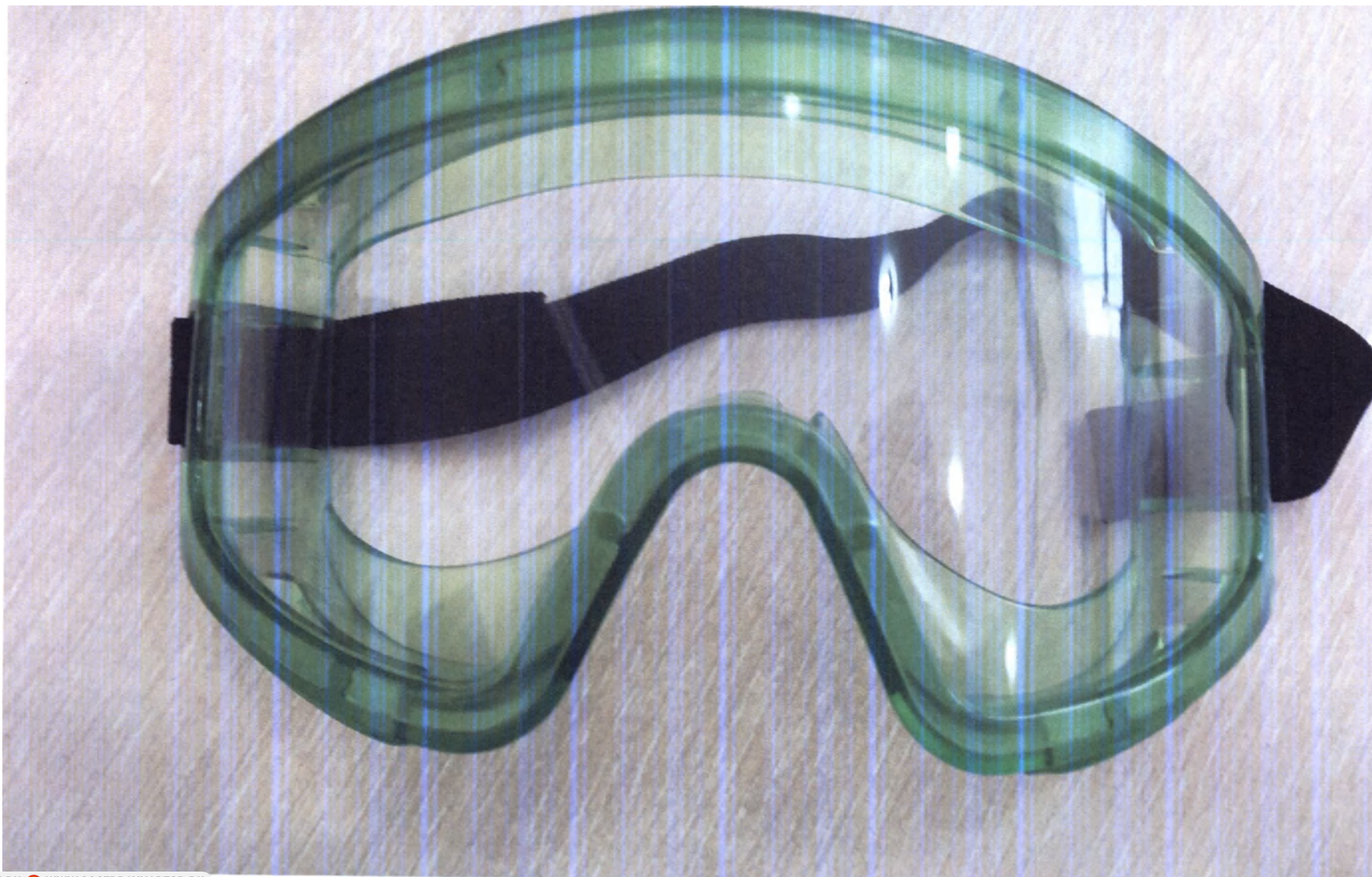


Сопутствующие предметы:

Контейнер полимерный с крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий на 1 л.




Ручка шариковая

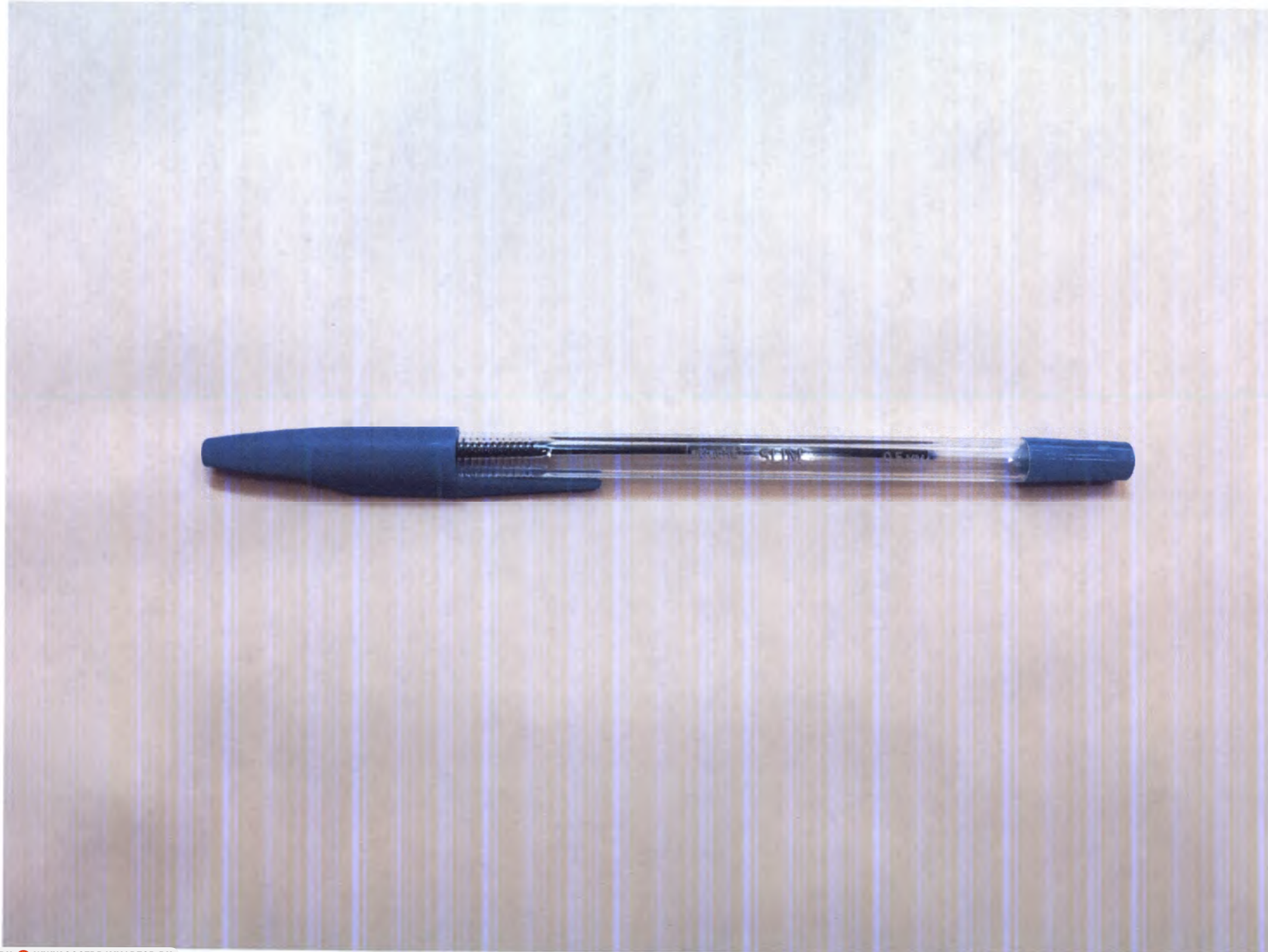

Простой карандаш




Маркер перманентный

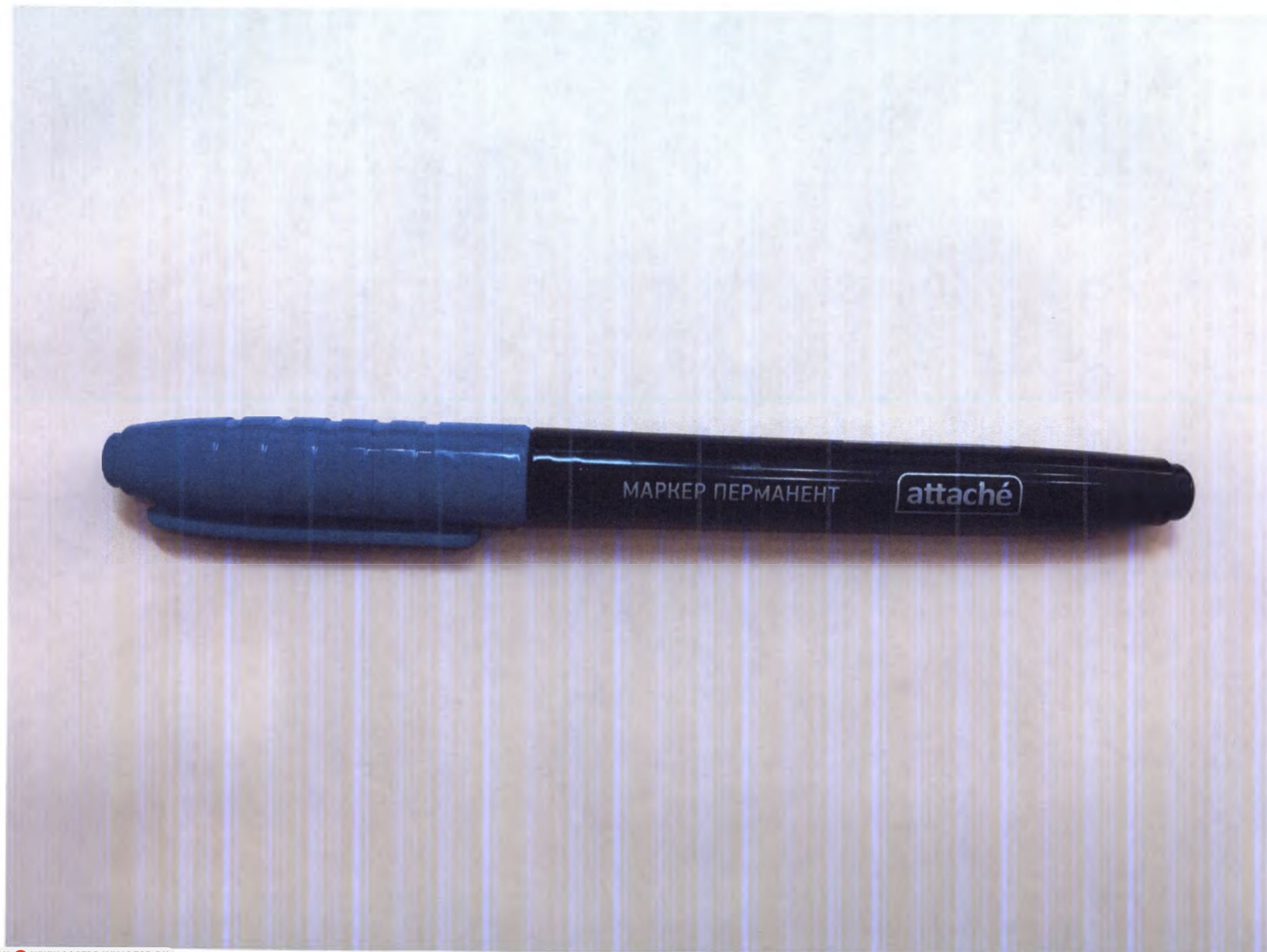

Ножницы



Клей ПВА-М

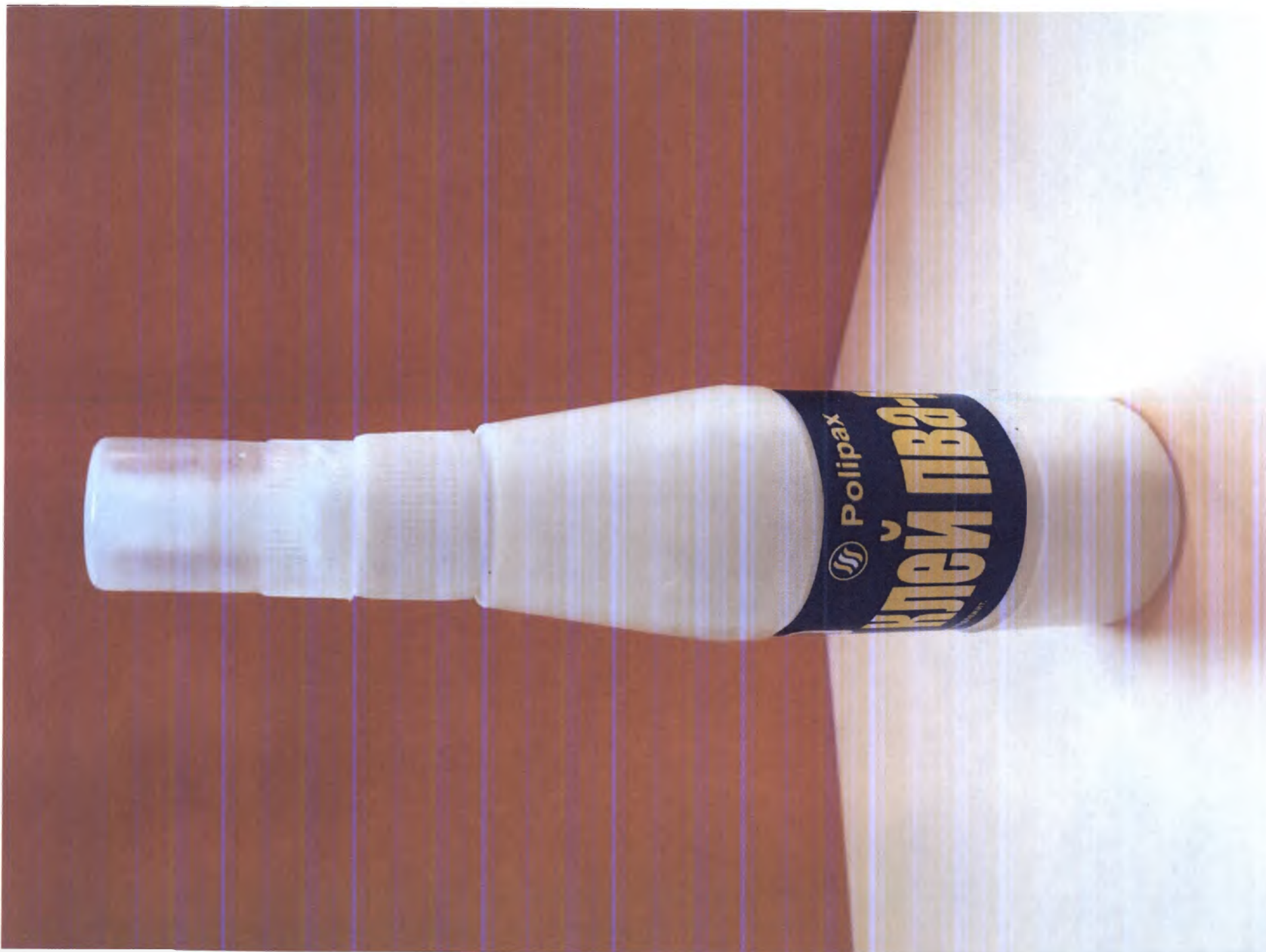


Скрепка канцелярская




Скотч




Папка с зажимом

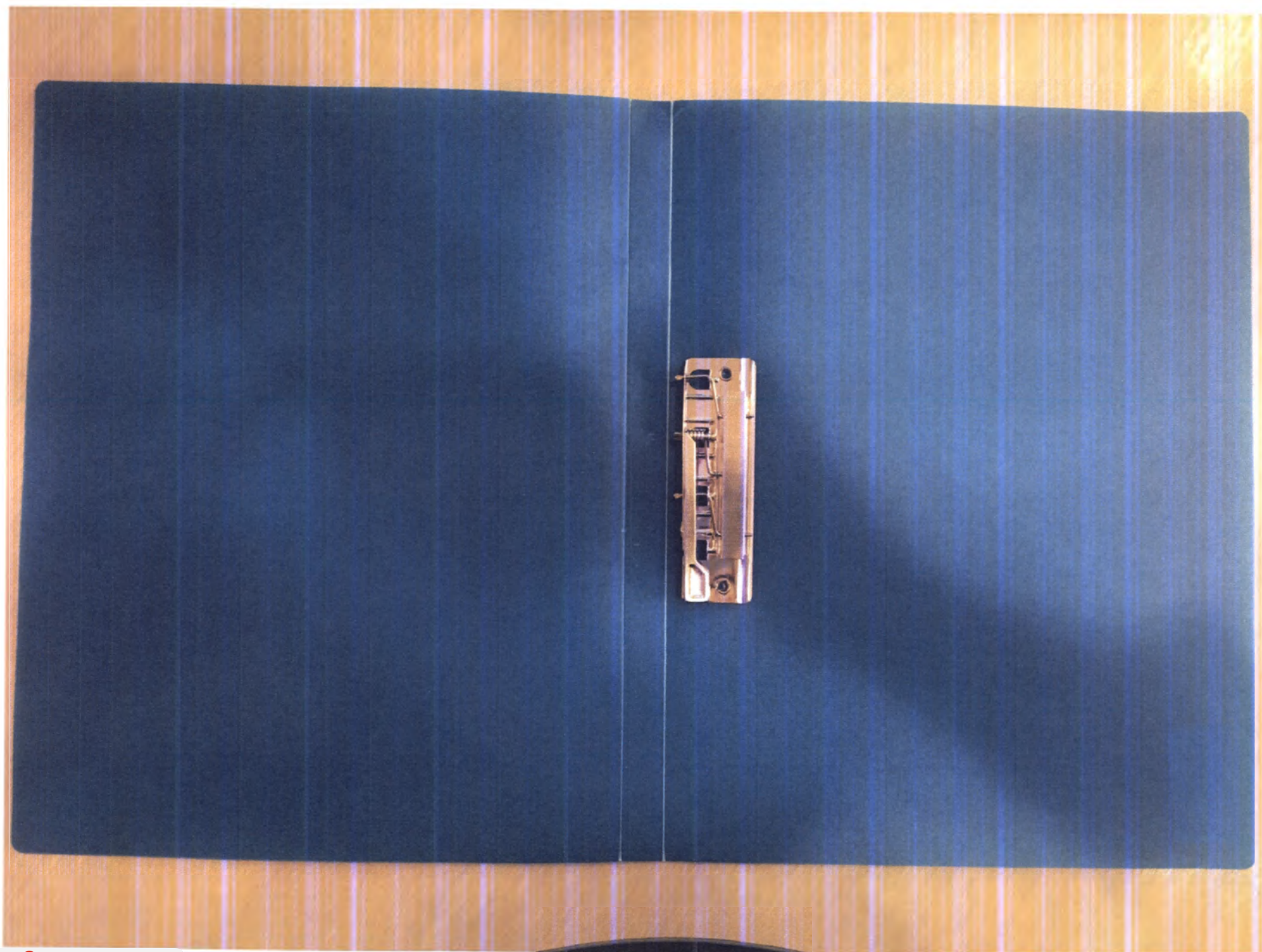


Бумага листовая А4

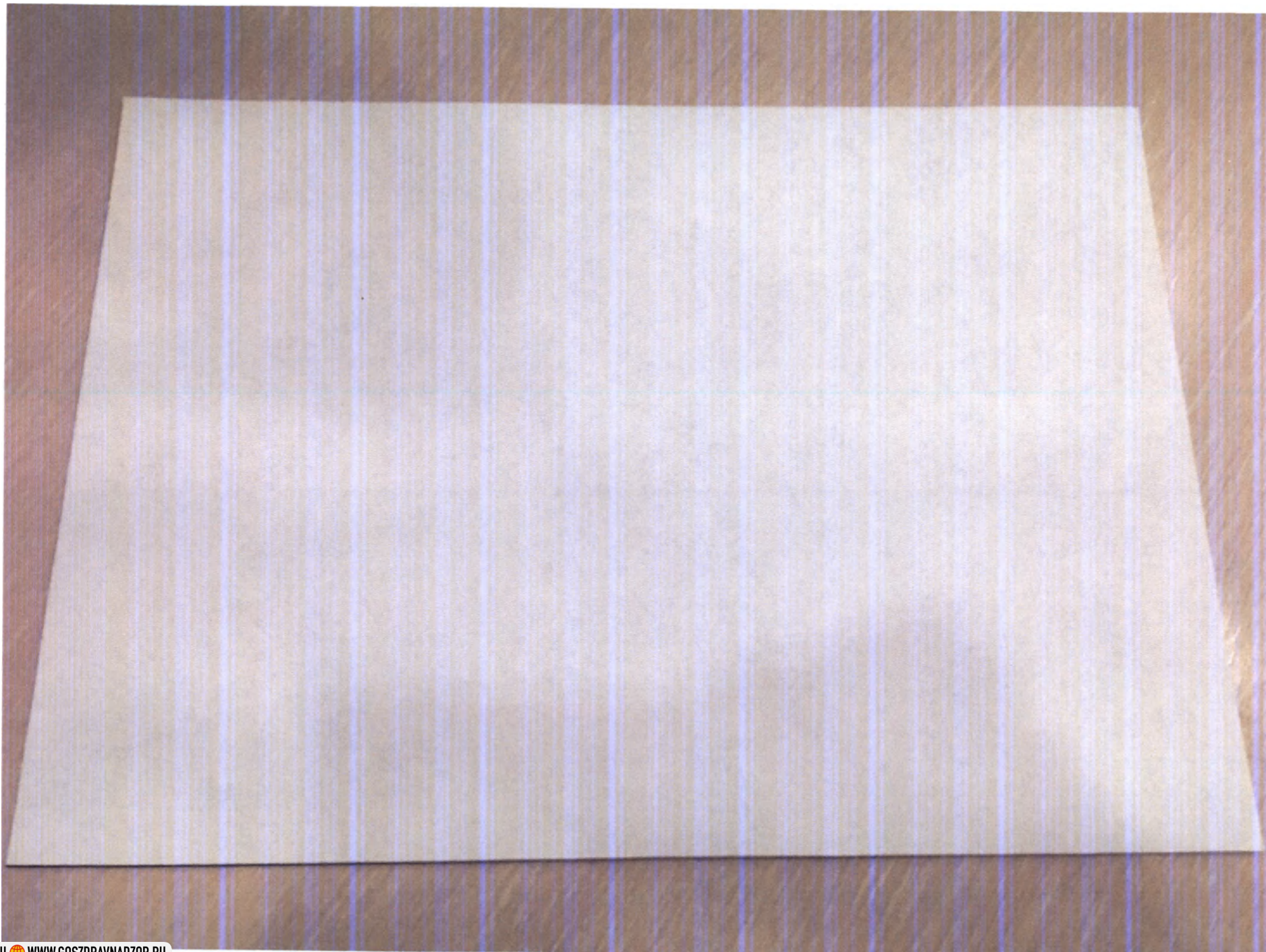

Бумага копировальная

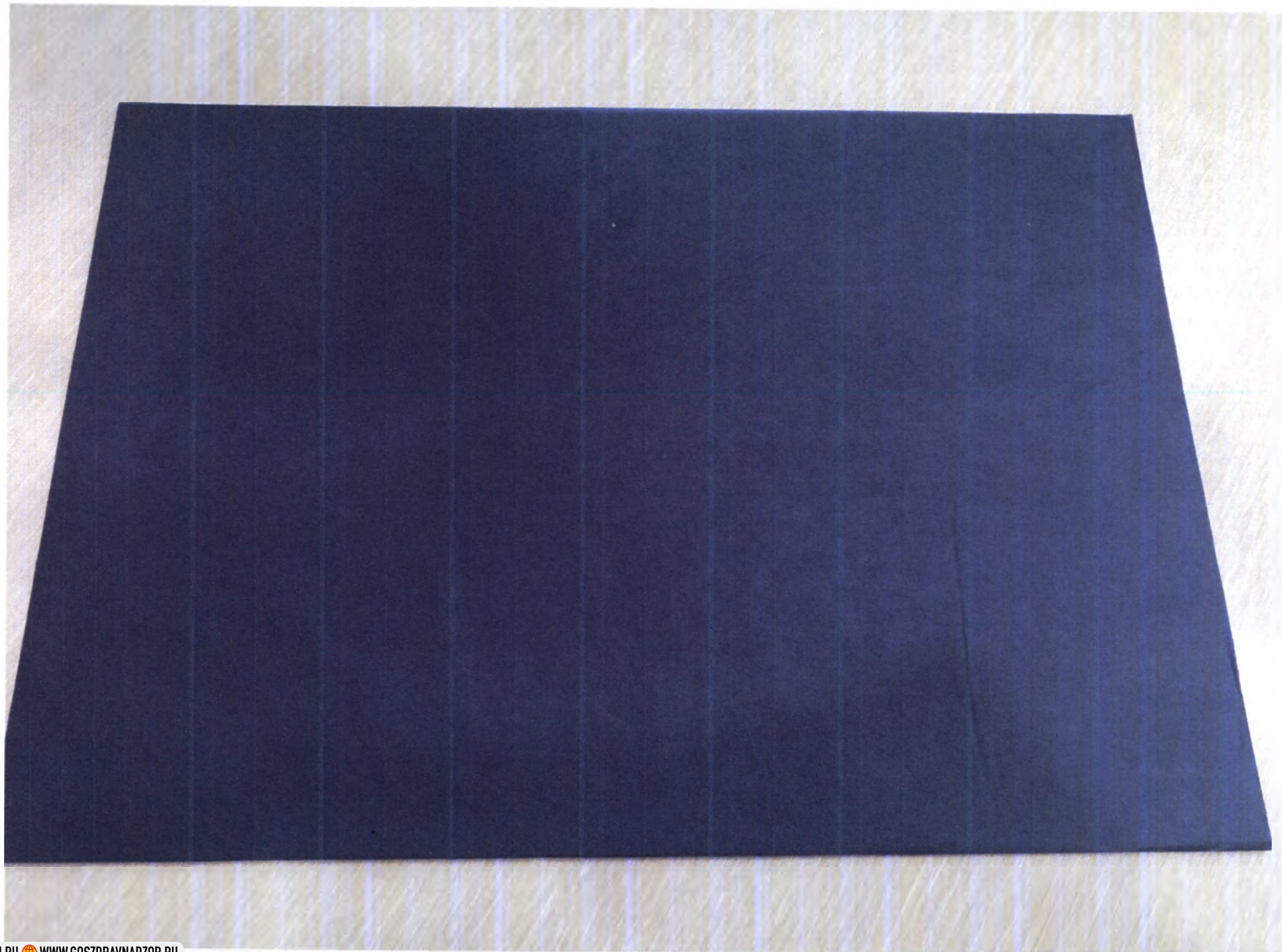


Бумага фильтровальная

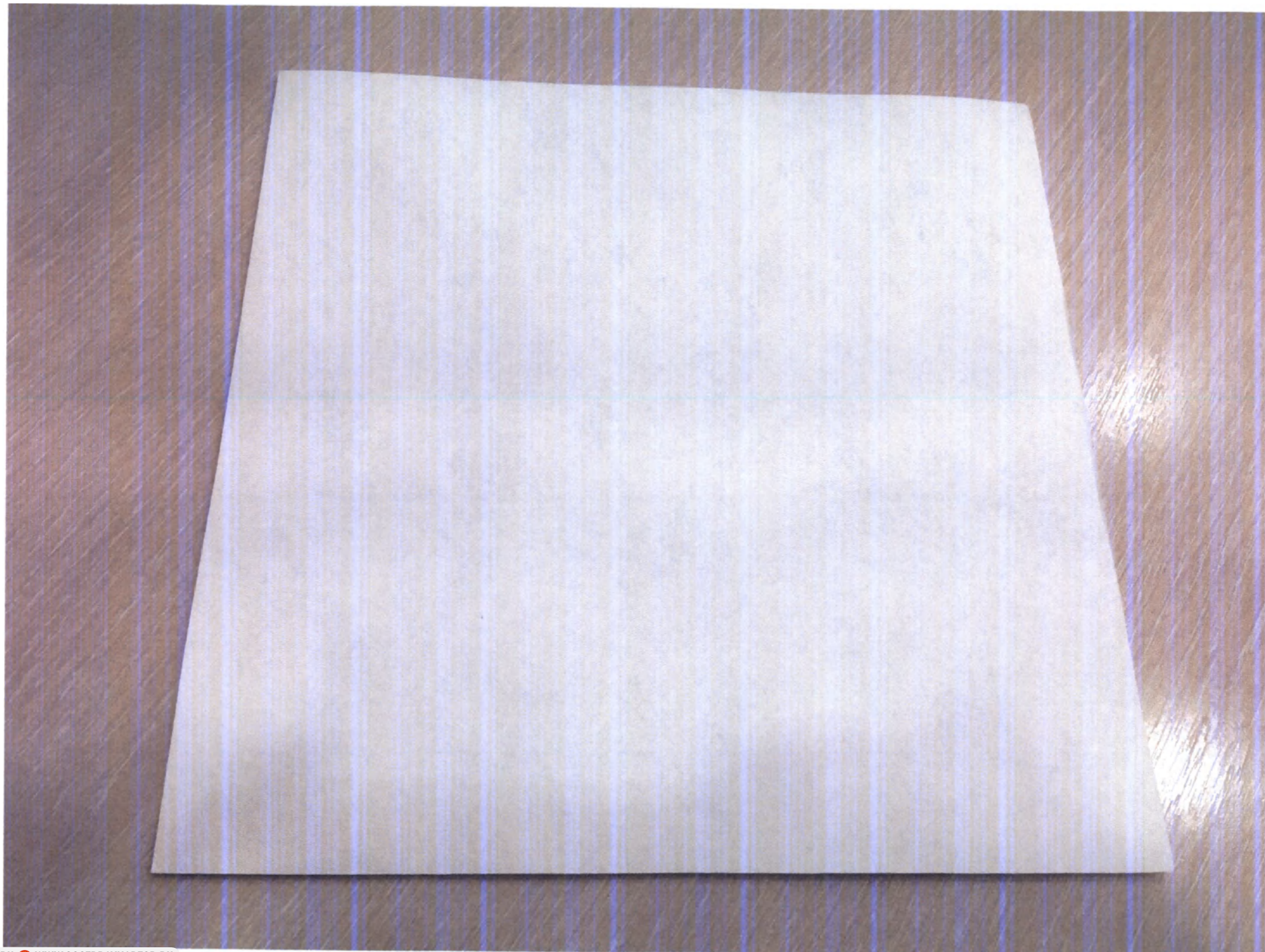


Скотч «Биологическая опасность»



Оградительная лента «Биологическая опасность»

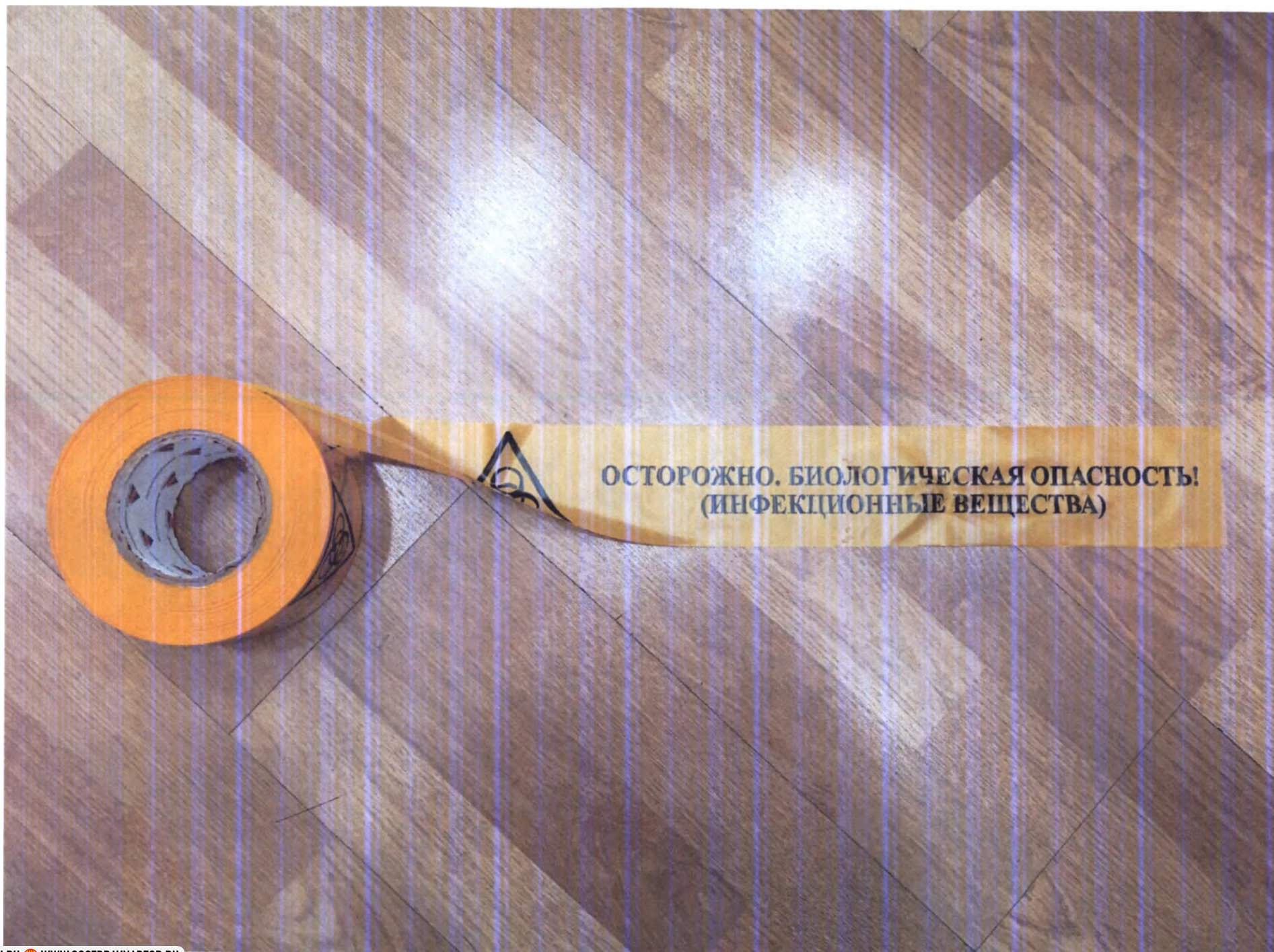



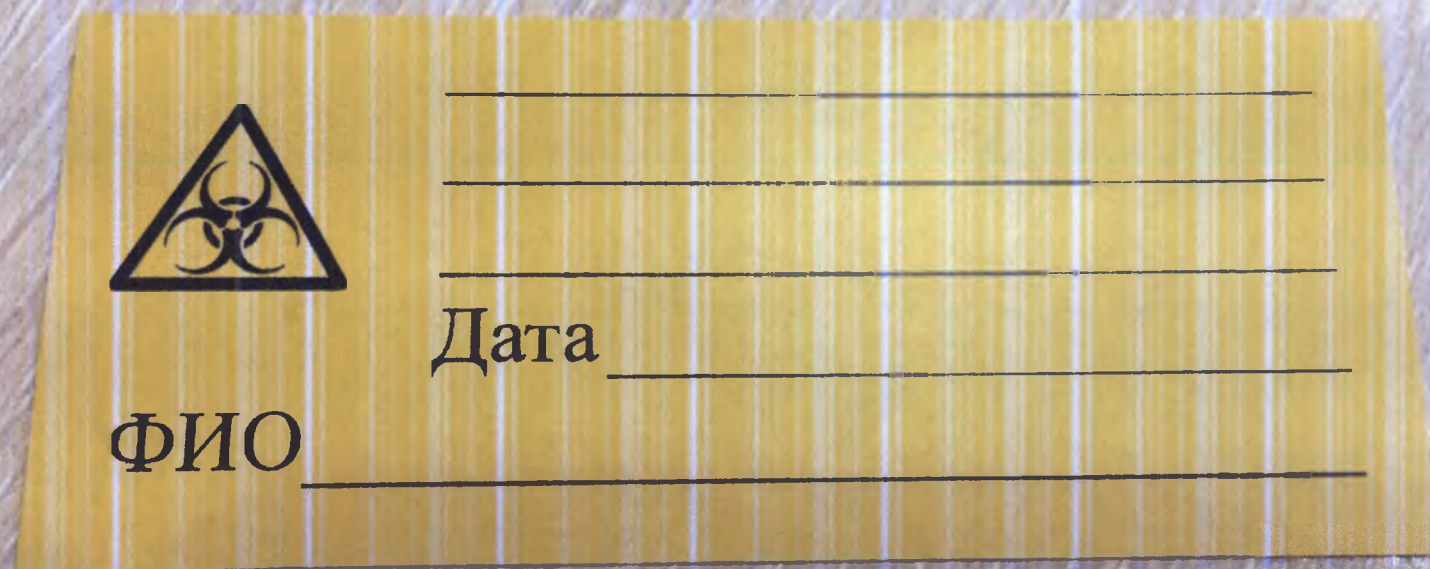

A yellow rectangular label with a black biohazard symbol in a triangle on the left. To the right of the symbol are three horizontal lines for text. Below the symbol is the text "ФИО" followed by a horizontal line. To the right of "ФИО" is the text "Дата" followed by a horizontal line. There are three more horizontal lines to the right of "Дата".

ПРАВИЛА ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТ БОЛЬНОГО (ТРУПА) ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЧУМОЙ, ХОЛЕРЫ, МАЛЯРИЕЙ И ДРУГИМИ ОСОБО ОПАСНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

6.1. Общие положения

Забор материала, как правило, производят в инфекционном стационаре. Забор клинического материала и его упаковку от больных и лиц, подозрительных на заражение или заболевание, осуществляют до начала лечения антибиотиками и другими химиопрепаратами врач-инфекционист или терапевт (хирург) стационара, где госпитализирован больной, в присутствии и под руководством вирусолога ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" или противочумного учреждения с соблюдением режима безопасности работы с материалом, подозрительным на зараженность возбудителями I-II групп патогенности. Секционный материал отбирают медицинские работники патологоанатомических отделений (БСМЭ) в присутствии специалиста по особо опасным инфекциям.

Материал забирают до начала специфического лечения стерильными инструментами в стерильную посуду.

Общие требования к забору проб биологического материала.

Для предохранения от инфицирования при заборе проб биоматериала и доставке их в лабораторию медицинский работник должен соблюдать следующие требования:

- не загрязнять наружную поверхность посуды при заборе и доставке проб;
- не загрязнять сопроводительные документы (направления);
- свести к минимуму непосредственный контакт пробы биоматериала с руками медицинского работника, забирающего и доставляющего пробы в лабораторию;
- использовать стерильные одноразовые или разрешенные к применению для этих целей в установленном порядке контейнеры (емкости) для забора, хранения и доставки проб;
- транспортировать пробы в переносках или укладках с отдельными гнездами;
- соблюдать асептические условия в процессе выполнения инвазивных мероприятий для предотвращения инфицирования пациента;
- забирать пробы в стерильную посуду, незагрязненную биоматериалом, не имеющую дефектов.

Весь инструментарий и другие предметы, использованные для взятия материала, обеззараживают кипячением в 2% растворе соды (или другого моющего средства) в течение 60 минут с момента закипания или в паровом стерилизаторе (пар под давлением 2,0 кг/кв. см, при 132 град. С) в течение 90 минут.

6.2. При подозрении на заболевание чумой

В зависимости от формы заболевания для исследования берут следующий материал:

- при кожной форме чумы - содержимое везикул, пустул, карбункулов, отделяемое язв, содержимое плотного инфильтрата, кровь;
- при бубонной - пунктат из бубона, кровь;
- при септической - кровь;
- при легочной - мокроту (слизь из зева), кровь.

Пунктат бубона

Материал из бубона берут стерильным шприцем емкостью не менее 5 мл.

НАПРАВЛЕНИЕ N _____ **на исследование**

от " ____ " _____ 200 ____ г.

Наименование объекта, адрес _____

время отбора _____ доставки _____

Условия транспортировки и хранения _____

Цель исследования _____

Дополнительные сведения _____

Вид упаковки _____

НТД на метод отбора _____

№ пробы	Наименование пробы, образца	Количество	Место и точка отбора

Фамилия и подпись отобравшего пробы _____

Сумка специальная для укладки



П А С П О Р Т

укладка противоэпидемическая медицинская УК-5М

(УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ ЛЮДЕЙ И ОБЪЕКТОВ
ОКР.СРЕДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ)

ТУ 9398-005-45508262-2010

Регистрационное удостоверение ФСП 2012/13489 от XX.XX.XXXX года

1. Назначение

Укладки предназначены для проведения первичных противоэпидемических мероприятий:

- взятии материала от больных или умерших и из объектов окружающей среды в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и в пунктах пропуска через государственную границу;
- патологоанатомического вскрытия умерших людей или трупов животных, проводимого в установленном порядке при болезнях неясной этиологии, подозрительных на особо опасную инфекционную болезнь;
- санитарно-эпидемиологического обследования эпидемического очага особо опасных инфекций (ООИ);
- выявления и учета лиц, контактировавших с больными с подозрением на ООИ;
- одновременного проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага ООИ.

2. Комплектность поставки

Комплектность укладки указана в упаковочном листе.

3. Техническое обслуживание

После работы в очаге ООИ использованные принадлежности укладки **ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ И ЧАСТИЧНО ДЕЗИНФЕКЦИИ** (согласно пункту 2.1.5), в соответствии с нормативами по охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Укладки должны транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 4.2 Ящики с Укладками при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы была исключена возможность их самопроизвольного перемещения.
- 4.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться способами, исключающими удары и броски ящиков с Укладками.
- 4.4 Укладки должны транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

5. Гарантии изготовителя

- 5.1 Организация – изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2 Гарантийный срок хранения Укладки – 3 года со дня изготовления, одноразовых изделий – указано на упаковке изделий, но не более 1 года.

Изготовитель: ООО «Д-Медфарм» тел.: (812) 322-17-32, 305-04-76, 322-61-07

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

Дата изготовления: август 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
31 мая 2007 г.
Дата введения:
1 августа 2007 г.

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОЛЕРЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУК 4.2.2218-07

(с изм., внесенными Дополнением, утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 18.01.2008)

1. Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ю.М.Федоров, Н.Я.Жилина); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт" (Ю.М.Ломов, Б.Н.Митянский, Л.С.Подосинникова, Л.Г.Воронежская, И.Я.Черепашкина, Т.А.Кудрякова, Б.Л.Мазрухо, Л.М.Смоликова, И.В.Рыжко, Р.И.Цураева, Э.А.Москвитина, Б.П.Голубев, С.О.Водопьянов, Е.В.Монахова, В.Д.Кругликов, Н.Р.Телесманич, А.Б.Мазрухо, В.В.Агафонова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Противочумный Центр" (А.А.Кюрегян, С.М.Иванова, Ю.С.Королев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" (А.К.Адамов, З.В.Малыхина, Т.В.Бугоркова, Н.И.Смирнова, Л.Ф.Ливанова, А.В.Топорков, С.И.Заднова, Н.А.Осина, Е.С.Казакова, Н.Б.Челдышева, А.В.Осин); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" (А.С.Марамович, В.С.Ганин, Л.Я.Урбанович, В.И.Погорелов, Л.В.Миронова, Е.С.Куликалова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" (В.Н.Савельев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Причерноморская противочумная станция" (Г.В.Гальцева); Государственным Центром по антибиотикам (С.В.Сидоренко); Российской медицинской академией последипломного образования (Е.А.Ведьмина); ГИСК им. Л.А.Тарасевича (Т.И.Анисимова, Л.В.Саяпина).

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 31 мая 2007 г.

3. Введены взамен методических указаний "Лабораторная диагностика холеры" МУ 4.2.1097-02.

1. Область применения

1.1. Методические указания "Лабораторная диагностика холеры" разработаны для внедрения и применения действующих нормативных документов, определяющих требования к

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 167 листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Д-Медфарм»

Резник О.Д.

