

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Д-Медфарм»



Резник О. Д.

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Комплект противочумный 1-го типа многократно
«Алмаз-1» по ТУ 9398-004-45508262-2010***

Производства

Общество с ограниченной
ответственностью «Д-Медфарм»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

Комплект противочумный 1-го типа многоразовый "Алмаз-1" по ТУ 9398-004-45508262-2010 в составе (общий вид упаковки)



Комплект противочумный 1-го типа **многоразовый «Алмаз-1»**

ТУ 9398-004-45508262-2010

Регистрационное удостоверение: ФСР 2012/13486 от XX.XX.XXXXг.

Класс потенциального риска – 2б
(см. указания по эксплуатации)

Размер _____

Рост _____

LOT

Партия _____



XX.XX.XXXXг.



XX.XX.XXXXг.

Гарантированный срок хранения: 5 лет

Производитель: ООО «Д-Медфарм»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н
Тел: 8 (812) 322-17-32
www.d-medfarm.com



От -50°C до +40°C

Пижама (рубашка и брюки) х/б бязь отбеленная



Пижама (рубашка и брюки) х/б бязь отбеленная




Противочумный халат удлиненный х/б бязь отбеленная



Косынка х/б бязь отбеленная размером 165x115 см.



Ватно-марлевая маска защитная (200x150 мм) 4-х слойная

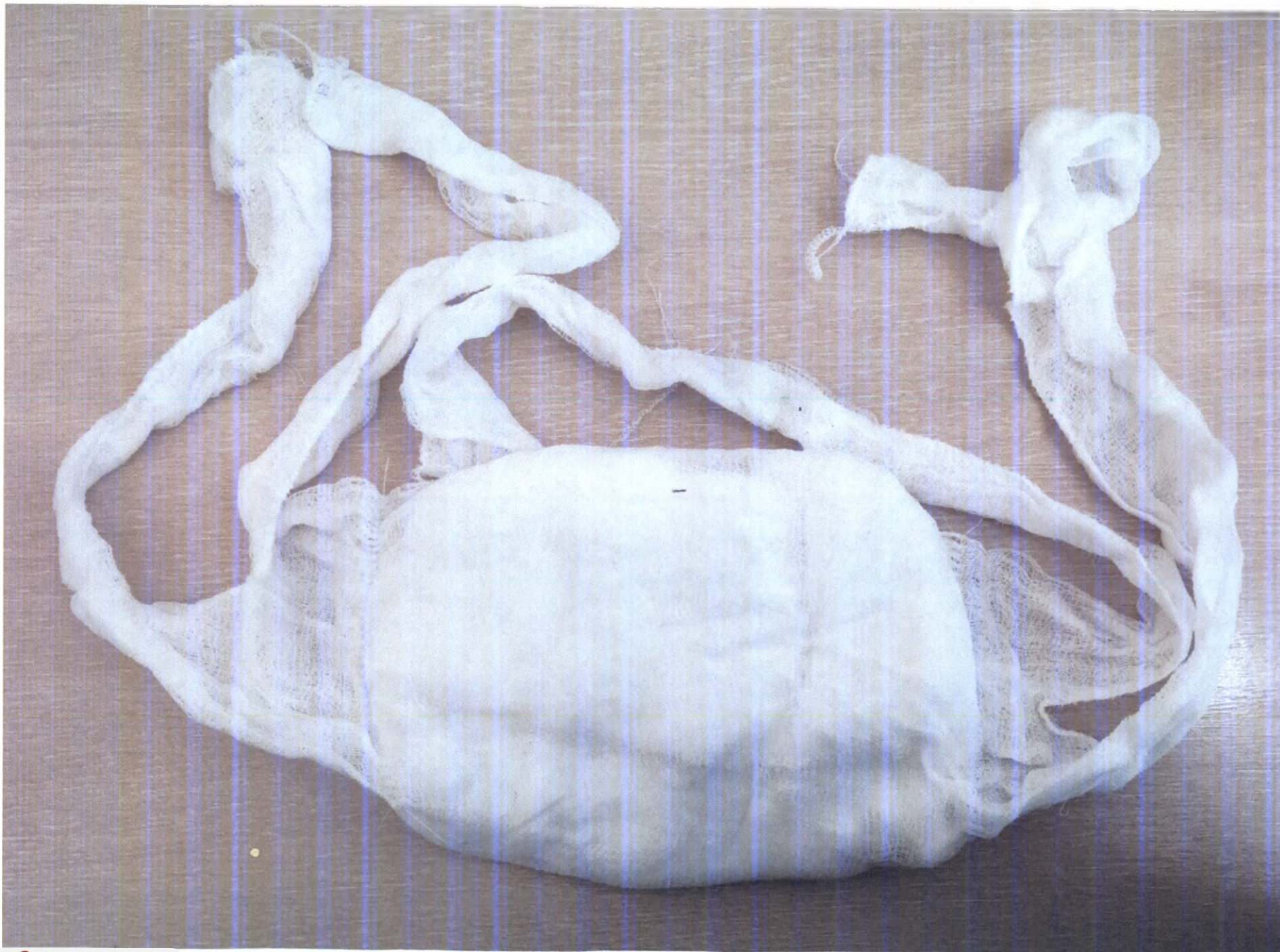


Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные




Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL)




Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL)

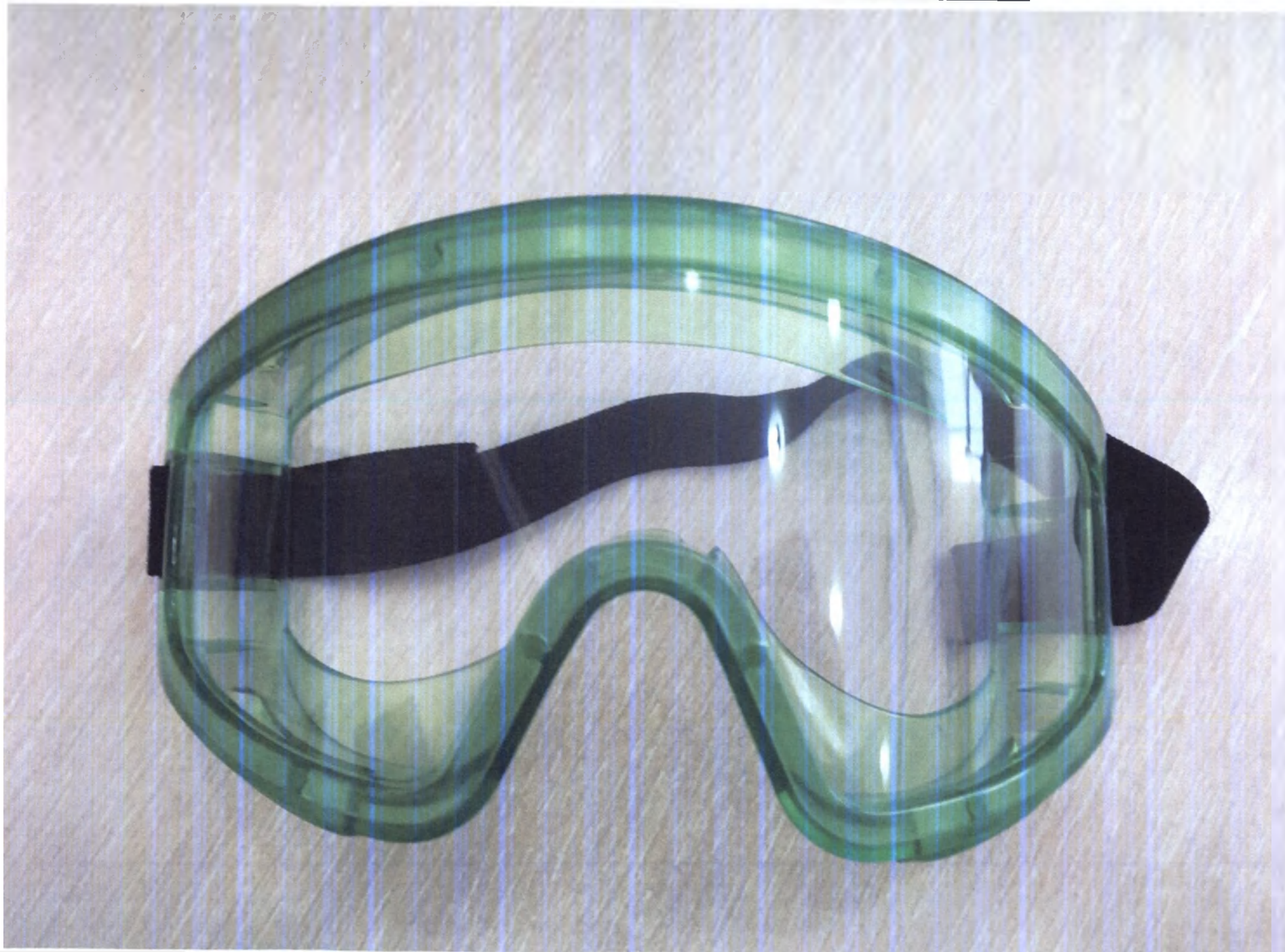

Фартук из прорезиненной ткани

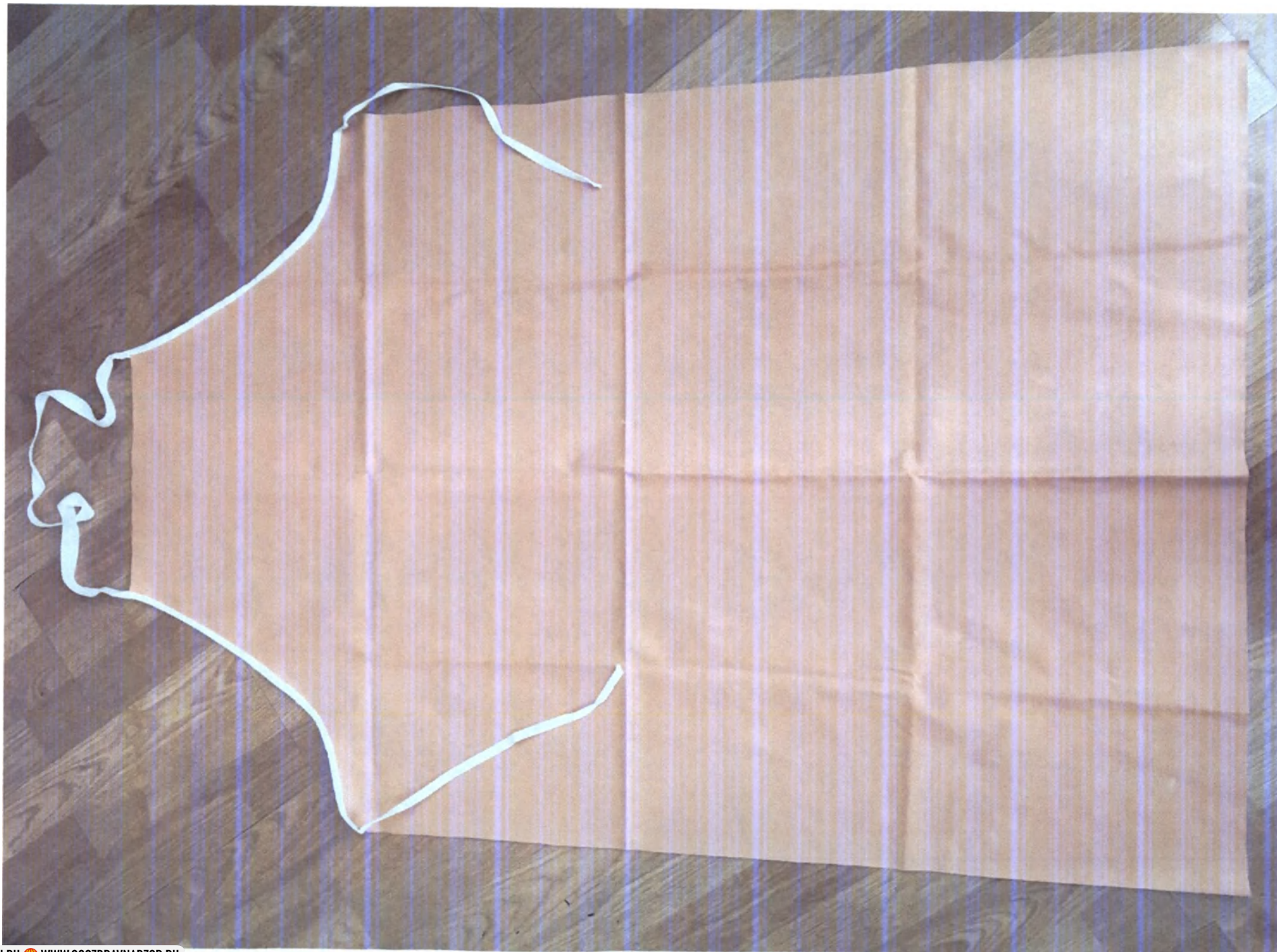


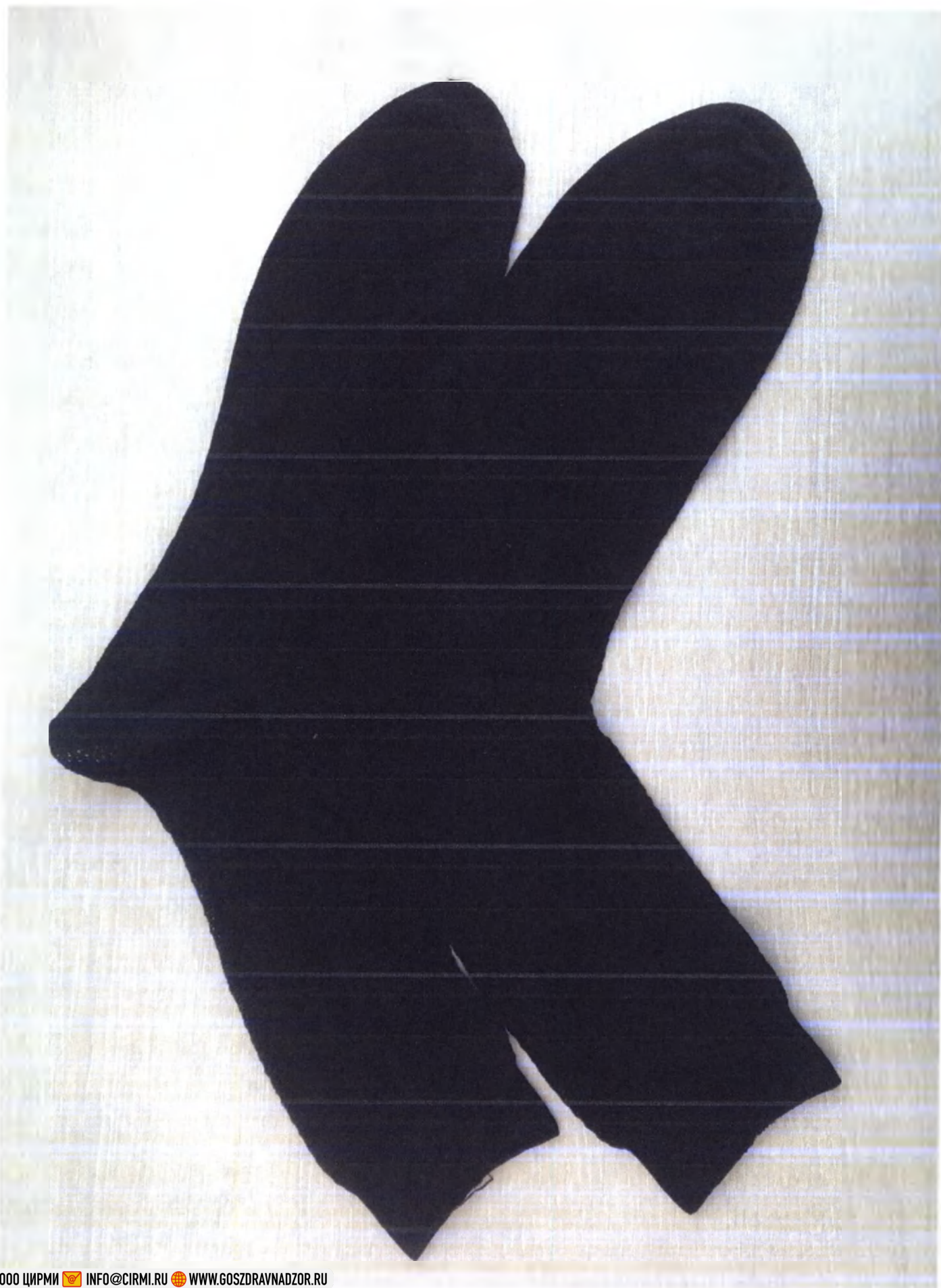

Бахилы из прорезиненной ткани




Полотенце вафельное

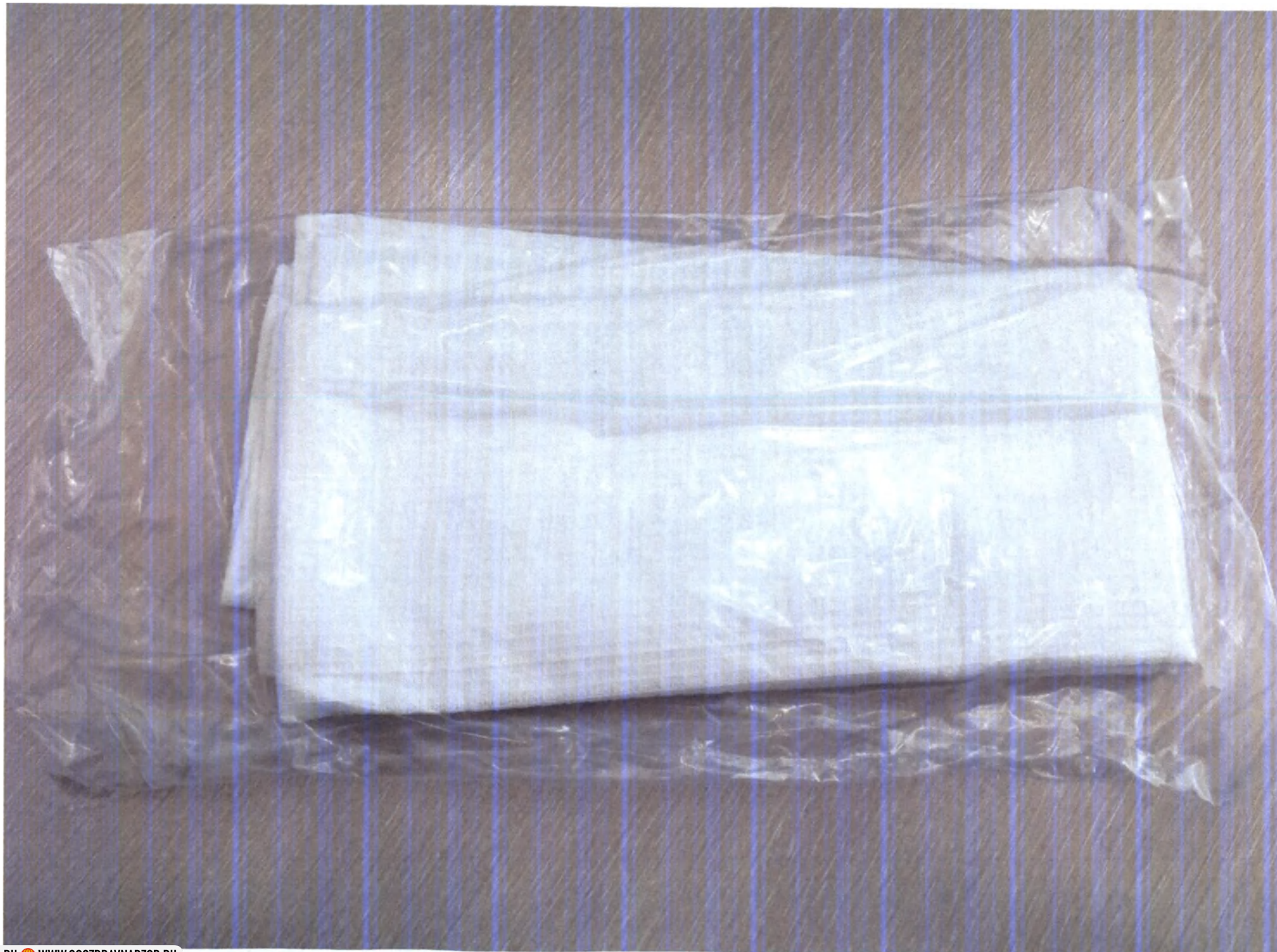

Упаковочная сумка



Упаковочный ПЭ пакет

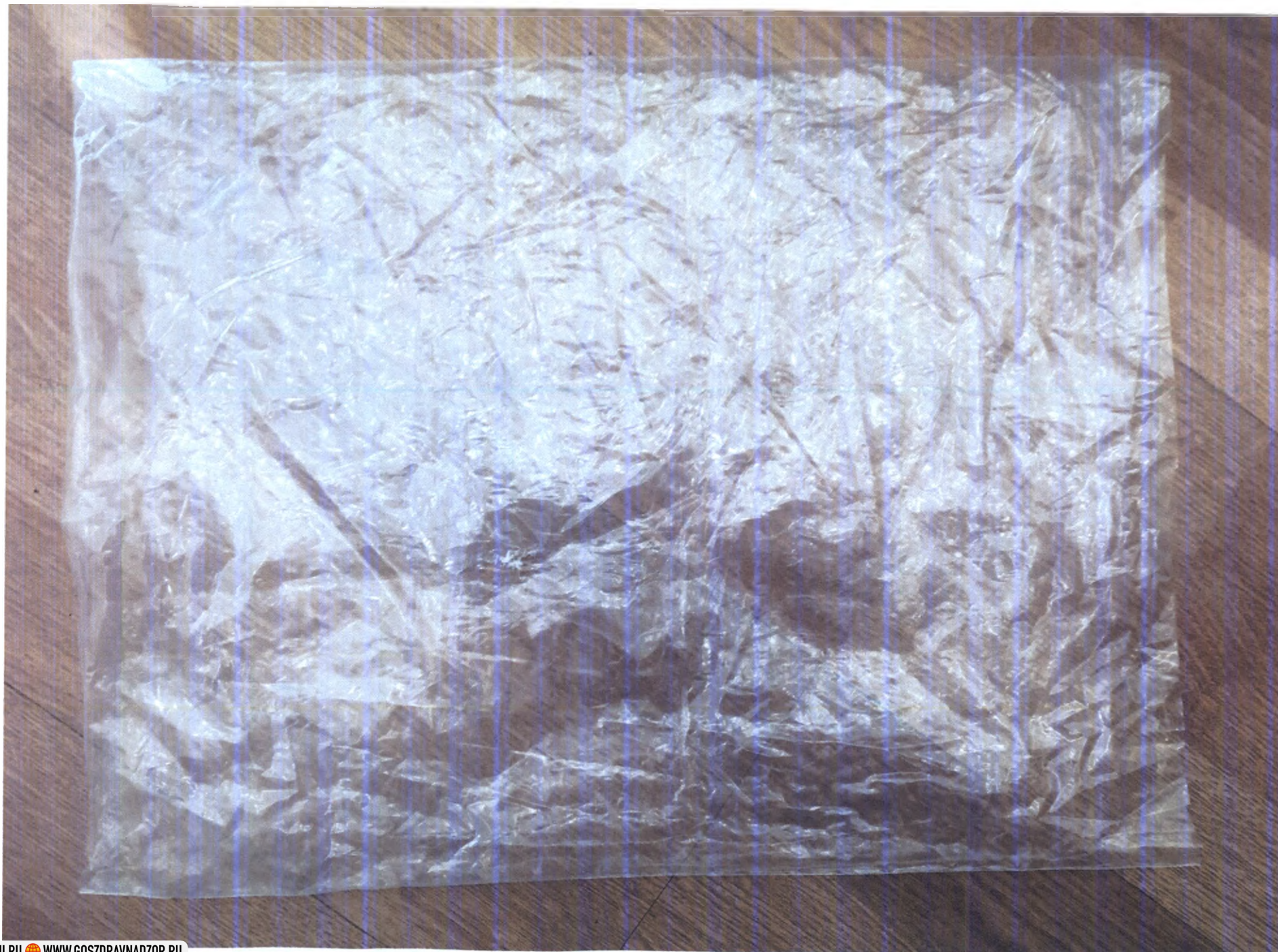

П А С П О Р Т

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ - 1 ТИПА

«Алмаз-1» (Бязь)

(ТУ 9398-004-45508262-2010)

1. Назначение

Комплект используют для защиты органов дыхания и кожных покровов медицинского персонала при работе с возбудителями особо опасных инфекций (чумы, бруцеллеза, туляремии, вегетативной формы сибирской язвы, сапа): в бактериологических боксах лабораторий противочумных учреждений (институты, станции, отделений); в отделах особо опасных инфекций санэпидстанций; в блоках с инфицированными животными тех же учреждений; в изоляторах, стационарах; на этапах медицинской эвакуации больных особо опасными инфекциями.

В комплект поставки входят:

- Пижама (рубашка и брюки) х б бязь отбеленная	1 шт.
- Противочумный халат удлиненный х б бязь отбеленная	1 шт.
- Косынка х б бязь отбеленная размером 165х115 см	1 шт.
- Ватно-марлевая маска защитная(200х150) 4-х слойная	1 шт.
- Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные	1 пара
- Очки защитные герметичные	1 шт.
- Фартук из прорезиненной ткани	1 шт.
- Носки	1 пара
- Бахилы из прорезиненной ткани	1 пара
- Полотенце вафельное	1 шт.
- Упаковочная сумка	1 шт.
- Упаковочный п э пакет	1 шт.
- Паспорт и памятка по обращению с комплектом	1 лист

Техническое обслуживание

Изделие многоразового использования. Подлежит дезинфекции или автоклавированию.

Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование изделий производится в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок для данного вида транспорта по ГОСТ № 10581-81.

4.2 Изделия хранятся в сухом проветриваемом помещении, в местах защищенных от попадания прямых солнечных лучей и не ближе 1м от отопительных приборов, в упакованном виде.

Гарантии изготовителя

5.1 Организация – изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, стерилизации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок хранения – 3 года или 10 циклов автоклавирования и дезинфекции. (см. памятку по обращению с костюмом)

Изготовитель: ООО «Д-Медфарм» тел.: (812) 322-17-32, 305-04-76, 322-61-07

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н|

Регистрационное удостоверение : ФСР 2012/13486 от XX.XX.XXXXг.

Дата изготовления: август 2018 г.

**ВНИМАНИЕ!!! НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ «ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С КОМПЛЕКТОМ
1-ТИПА «АЛМАЗ-1»**

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С КОМПЛЕКТОМ 1 ТИПА «Алмаз-1»

При получении- вскрыть и проверить.

Порядок одевания противочумного костюма:

Костюм необходимо одевать не спеша, тщательно, с тем, чтобы во время работы не поправлять части костюма.

В пред заражном отделении снимается медицинская одежда работника.

- Надеваются пижама и носки.
 - Надеваются резиновые бахилы. Штаны заправляются во внутрь. По ноге затягивается голенище.
 - Надевается шапочка-шлем, тщательно убираются волосы.
 - Надевается противочумный халат.
 - Завязываются петлей тесемки у воротника на левой стороне.
 - Затем завязывается пояс, на спине продевается через петлю.
 - Пояс завязывается также с петлей на левой стороне.
 - Затем завязываются тесемки на рукавах.
 - Затем надевается ватно-марлевая маска.
 - Первые концы маски завязываются петлей сначала на затылке.
 - Вторые концы маски завязываются на темени.
 - Перед надеванием очки-консервы натираются жидкостью, чтобы не запотевали стекла.
 - Очки консервы должны быть хорошо пригнаны (свободное место закладывается ватным тампоном).
 - Проверяются на целостность и надеваются перчатки.
 - За пояс, с правой стороны, заправляется полотенце.
- При вскрытии трупов человека или животных, погибших от чумы, дополнительно надевают клеенчатый фартук и нарукавники в следующем порядке после надевания перчаток.
- Надевается клеенчатый фартук.
 - Пояс фартука завязывается с левой стороны петлей.

Набор дезсредств для обеззараживания противочумного костюма:

- 1) Бак с 5% раствором карболовой кислоты (для обеззараживания полотенца, халата, шапочки-шлема) или бикс (большой).
 - 2) Тазик с 5% раствором карболовой кислоты для мытья рук и перчаток.
 - 3) Банка с 5% раствором карболовой кислоты для замочки перчаток.
 - 4) Банка с 70% спиртом для замочки очков.
- Снимается костюм медленно, не торопясь, и в строго установленном порядке.

После снятия каждой части костюма руки в перчатках должны обмываться дезраствором. Тесемки халата и фартука, завязанные петлей с левой стороны, облегчают быстрое снятие костюма.

- 5) Тщательно моют руки в перчатках в 5% растворе карболовой кислоты

Порядок раздевания противочумного костюма:

- 6) Медленно, без рывка, вынимается полотенце и погружается в бак с 5% раствором карболовой кислоты.
 - 7) При снятии клеенчатый фартук свертывается наружной стороной внутрь.
 - 8) Опускается в бак с 5% раствором карболовой кислоты.
 - 9) 2-мя руками оттягиваются вперед очки и осторожно снимаются.
 - 10) Погружают очки в банку с 70% спиртом.
 - 11) Осторожно снимается маска, не касаясь лица наружной стороной респиратора.
 - 12) Маска защитная складывается в бикс для автоклавирования или замачивается в банке с дезраствором.
 - 13) Сначала опускают перчатки, освобождая завязки рукавов халата.
 - 14) Затем снимают халат, завертывая его внутрь.
 - 15) Замачивают в дезрастворе или складывают в бикс для автоклавирования.
 - 16) Снимается шапочка-шлем и замачивается в дезрастворе.
 - 17) Снимают перчатки, проверяют на целостность. Погружают в банку с дезраствором.
 - 19) Обмываются бахилы в баке с дезраствором и снимаются в предзаразной комнате.
- После снятия противочумного костюма, тщательно моются руки теплой водой с мылом (по желанию работника может быть принят душ). После этого надевается обычная медицинская одежда и продолжается работа

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

ООО «Д-Медфарм»

Тел./факс: (812) 322-17-32, 305-04-76

Регистрационное удостоверение : ФСР 2012/13486 от XX.XX.XXXXг.

Дата изготовления: АВГУСТ 2018 г.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 19 листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Ц-Медфарм»

Резник О.Д.

