

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор


ООО «МПК «Елец»

В.Ю. Моисеева



Фотографические изображения медицинского изделия

Устройства полимерные для переливания крови, кровезаменителей
и инфузионных растворов однократного применения стерильные
ПК 23-05-«МПК «Елец» с иглами инъекционными по
ТУ 32.50.13-018-74017482-2018,
производства ООО «МПК «Елец», Россия

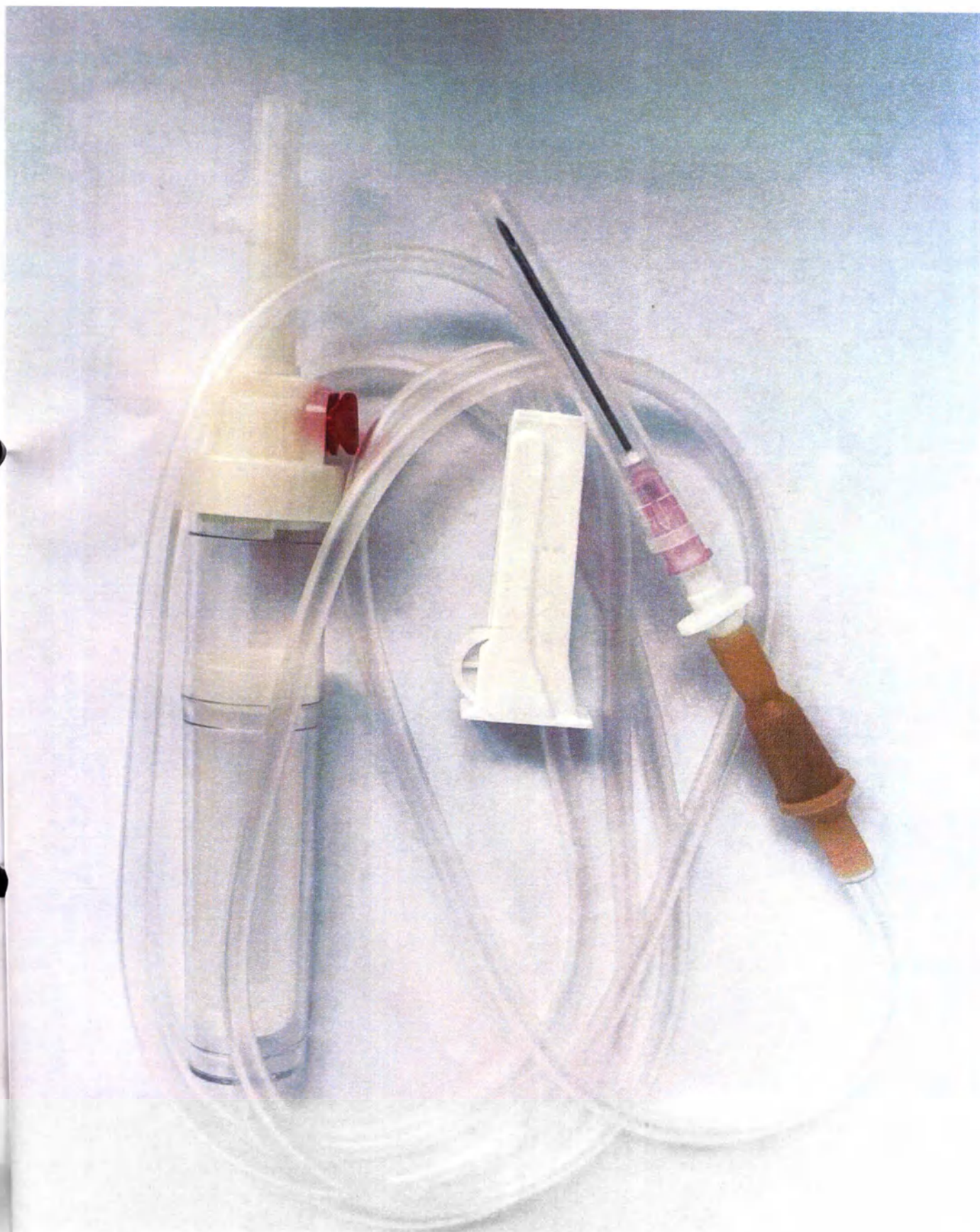

Фотография 1. Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей
и инфузий, многоразового применения стерильное ПК 23-05-«МПК «Елец»
с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-018-74017482-2018 Общий вид.



УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ ПК 23-05-"МПК "ЕЛЕЦ"
С ИГЛОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ПО ТУ 32.50.13-018-74017482-2018

РП № ПЗН 2019/8556 от 03.07.2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- использовать потерегающую тару и извещать устройство
закрыть замок
- Снять предохранительный колпачок с штырь соединенной полимерной дозированной и ввести ее в бутыл подполненной емкости (поплавателя) или поплавок стальной бутылки
- перевести контргерма или бутылку и загерметизировать на штамп
- заполнить камеру баллоном до положенной, одолжить ее корпус
- при использовании стальной бутылки открутить закрутку воздушного клапана, при влипании из контргерма клапана не откручивать
- открыть замок и выпустить воздух, заложив устройство до положенной воздушная
- закрыть замок
- Снять предохранительный колпачок с штырь инденторной и привести безупречно
- открыть замок и установить неограниченную свободу потока


FOCT 25047



4607156 550685



STERILE EO

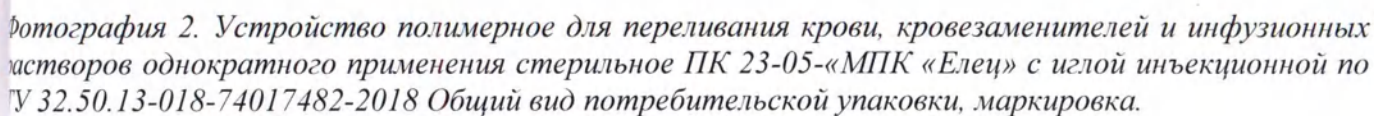

ПАРТИЯ № 45
04.2023
до 04.2028

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ ПК 23-05-«МПК «ЕЛЕЦ» С ИГЛОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ПО ТУ 32.50.13-018-74017482-2018

ГОСТ 25047

ПУ № РЗН 2019/8556 от 03.07.2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство.
- закрыть зажим.
- снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной, двухканальной и ввести ее в шпатель полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- перевернуть контейнер или бутылку и закрепить на штативе.
- заполнить капельницу до половины, сдавливая ее корпус.
- при использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать!)
- открыть зажим и выпустить воздух, заполнить устройство до полного вытеснения воздуха.
- закрыть зажим.
- снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венепункцию.
- открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ / НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО / НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО.
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ. НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКСА
- СРОК ГОДНОСТИ ПЯТЬ ЛЕТ.
- ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ И СРОК ГОДНОСТИ (ГОДЕН ДО) СМ. НА УПАКОВКЕ
- СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ / АПИРОГЕННО / НЕТОКСИЧНО
- СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
- РАЗМЕР ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННОЙ 1,20 X 40,0 (18 G) TW



STERILE EO

Фотография 3. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПК 23-05-«МПК «Елец» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-018-74017482-2018.

МПК Елец Медико-Производственная Компания «Елец»		Изготовлено: ООО «Медико-производственная компания «Елец» Адрес: 399774, Россия, Липецкая область, г. Елец, пер. Кирпичный, д. 27 тел.: 8 (47467) 5-19-65 E-mail: mpk-elets@mail.ru	
УСТРОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ ПК 23-05-«МПК ЕЛЕЦ» С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ ПО ТУ 32.50.13-018-74017482-2018 Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8556 от 03.07.2019г. УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ ПК 23-05-«МПК «ЕЛЕЦ» С ИГЛОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ПО ТУ 32.50.13-018-74017482-2018 ГОСТ 25047			
КОЛИЧЕСТВО: 150 ШТ.		ПАРТИЯ № 45	
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ / АПИРОГЕННО / НЕТОКСИЧНО СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ / НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО СРОК ГОДНОСТИ ПЯТЬ ЛЕТ РАЗМЕР ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННОЙ 1,20 X 40,0 MM (18 G) TW		ОТК ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ: 04.2023 ГОДЕН ДО: 04.2028 МАССА БРУТТО: 5KG	
Условия хранения +40°C Хранить при температуре от +5°C до +40°C; относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°C.		ПК 23-05	
Условия транспортирования +56°C Транспортировать при температуре от минус 50°C до +50°C; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C.			

Фотография 4. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПК 23-05-«МПК «Елец» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-018-74017482-2018.



Фотография 5 Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПК 23-05-«МПК «Елец» иглами инъекционными по ТУ 32.50.13-018-74017482-2018 Общий вид.



МПК Елец®
ООО Медико-Производственная
Компания «Елец»

ООО «Медико-производственная компания «Елец»
Адрес: Россия, 399774, Липецкая обл, г. Елец, Кирпичный пер., д. 27
Тел/факс: (47467) 5-19-65. E-mail: mpk-elets@mail.ru

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНFUЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ ПК 23-05-«МПК "ЕЛЕЦ" С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ ПО ТУ 32.50.13-018-74017482-2018

ГОСТ 25047

РУ № РЗН 2019/8556 от 03.07.2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ВСКРЫТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ТАРУ И ИЗВЛЕЧЬ УСТРОЙСТВО.
- ЗАКРЫТЬ ЗАЖИМ.
- СНЯТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК С ИГЛЫ СОВМЕЩЕННОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ДВУХНАЛЬНОЙ И ВВЕСТИ ЕЕ В ШТУЦЕР ПОЛИМЕРНОЙ ЕМКОСТИ (КОНТЕЙНЕРА) ИЛИ ПРОБКУ СТЕКЛЯННОЙ БУТЫЛКИ.
- ПЕРЕВЕРНУТЬ КОНТЕЙНЕР ИЛИ БУТЫЛКУ И ЗАКРЕПИТЬ НА ШТАТИВЕ.
- ЗАПОЛНИТЬ КАПЕЛЬНИЦУ ДО ПОЛОВИНЫ, СДАВЛИВАЯ ЕЕ КОРПУС.
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК ОТКРЫТЬ ЗАПУШКУ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА. (ПРИ ВЛИВАНИИ ИЗ КОНТЕЙНЕРА КЛАПАН НЕ ОТКРЫВАТЬ).
- ОТКРЫТЬ ЗАЖИМ И ВЫПУСТИТЬ ВОЗДУХ, ЗАПОЛНИВ УСТРОЙСТВО ДО ПОЛНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ ВОЗДУХА.
- ЗАКРЫТЬ ЗАЖИМ.
- СНЯТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК С ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННОЙ И ПРОИЗВЕСТИ ВЕНЕПУНКЦИЮ.
- ОТКРЫТЬ ЗАЖИМ И УСТАНОВИТЬ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ПОТОКА.

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ / НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО / НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ / НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКСА
- СРОК ГОДНОСТИ ПЯТЬ ЛЕТ.
- ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ И СРОК ГОДНОСТИ (ГОДЕН ДО) СМ НА УПАКОВКЕ
- СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ / АЛИРОГЕННО / НЕТОКСИЧНО
- СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
- РАЗМЕР ИГЛ ИНЪЕКЦИОННЫХ 1,20x40,0 мм (18 G) TVV 1,20x40,0 мм (18 G) TVV



STERILE EO

ПАРТИЯ 45
04.2023
ДО 04.2028

Фотография 6. Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПК 23-05-«МПК «Елец» с иглами инъекционными по ТУ 32.50.13-018-74017482-2018 Общий вид потребительской упаковки, маркировка.

ПАРТИЯ 45
04.2023
ДО 04.2028

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ ПК 23-05-«МПК «ЕЛЕЦ» С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ ПО ТУ 32.50.13-018-74017482-2018

ГОСТ 25047

РУ № РЗН 2019/8556 от 03.07.2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ВСКРЫТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ТАРУ И ИЗВЛЕЧЬ УСТРОЙСТВО.
- ЗАКРЫТЬ ЗАЖИМ.
- СНЯТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК С ИГЛЫ СОВМЕЩЕННОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ДВУХКАНАЛЬНОЙ И ВВЕСТИ ЕЕ В ШТУЦЕР ПОЛИМЕРНОЙ ЕМКОСТИ (КОНТЕЙНЕРА) ИЛИ ПРОБКУ СТЕКЛЯННОЙ БУТЫЛКИ.
- ПЕРЕВЕРНУТЬ КОНТЕЙНЕР ИЛИ БУТЫЛКУ И ЗАКРЕПИТЬ НА ШТАТИВЕ.
- ЗАПОЛНИТЬ КАПЕЛЬНИЦУ ДО ПОЛОВИНЫ, СДАВЛИВАЯ ЕЕ КОРПУС.
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК ОТКРЫТЬ ЗАПУСКОВЫЙ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА. (ПРИ ВЛИВАНИИ ИЗ КОНТЕЙНЕРА КЛАПАН НЕ ОТКРЫВАТЬ).
- ОТКРЫТЬ ЗАЖИМ И ВЫПУСТИТЬ ВОЗДУХ, ЗАПОЛНИВ УСТРОЙСТВО ДО ПОЛНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ ВОЗДУХА.
- ЗАКРЫТЬ ЗАЖИМ.
- СНЯТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК С ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННОЙ И ПРОИЗВЕСТИ ВЕНЕПУНКЦИЮ.
- ОТКРЫТЬ ЗАЖИМ И УСТАНОВИТЬ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ПОТОКА.

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ / НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО / НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ / НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКСА
- СРОК ГОДНОСТИ ПЯТЬ ЛЕТ.
- ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ И СРОК ГОДНОСТИ (ГОДЕН ДО) СМ. НА УПАКОВКЕ
- СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ / АПИРОГЕННО / НЕТОКСИЧНО
- СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
- РАЗМЕР ИГЛ ИНЪЕКЦИОННЫХ: 1,20x40,0 мм (18 G) * 1,20x40,0 мм (19 G) * 1,20x40,0 мм (20 G) * 1,20x40,0 мм (21 G) * 1,20x40,0 мм (22 G) *



STERILE EO

Фотография 7. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПК 23-05-«МПК «Елец» с иглами инъекционными по ТУ 32.50.13-018-74017482-2018.

МПК Елец Медико-Производственная Компания «Елец»		Изготовлено: ООО «Медико-производственная компания «Елец» Адрес: 399774, Россия, Липецкая область, г. Елец, пер. Кирпичный, д. 27 тел.: 8 (47467) 5-19-65 E-mail: mpk-elets@mail.ru	
УСТРОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ ПК 23-05-«МПК ЕЛЕЦ» С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ ПО ТУ 32.50.13-018-74017482-2018 Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8556 от 03.07.2019г. ГОСТ 25047 УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ ПК 23-05-«МПК «ЕЛЕЦ» С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ ПО ТУ 32.50.13-018-74017482-2018			
КОЛИЧЕСТВО: 150 ШТ.		ПАРТИЯ № 45	
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ / АПИРОГЕННО / НЕТОКСИЧНО СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ / НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО СРОК ГОДНОСТИ ПЯТЬ ЛЕТ РАЗМЕР ИГЛ ИНЪЕКЦИОННЫХ: 1,20 X 40,0 MM (18 G) TW 1,20 X 40,0 MM (19 G) TW STERILE EO		ОТК	
Условия хранения +40°C 80% Хранить при температуре от +5°C до +40°C; относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°C		ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ: 04.2023	
Условия транспортирования: -10°C 98% Транспортировать при температуре от минус 50°C до +50°C; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C		ГОДЕН ДО: 04.2028	
Условия хранения +40°C 80% Хранить при температуре от +5°C до +40°C; относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°C		МАССА БРУТТО: 5КГ	
Условия транспортирования: -10°C 98% Транспортировать при температуре от минус 50°C до +50°C; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C		ПК 23-05	

Фотография 8. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПК 23-05-«МПК «Елец» с иглами инъекционными по ТУ 32.50.13-018-74017482-2018.

Прошнуровано и
пронумеровано

7 (семь)

листов

Генеральный директор
ООО «МПК «Елец»

Моисеева В.Ю.

