

**Инструкция по использованию для стелек
ортопедических варианты исполнения:
Стельки ортопедические igli**

1. Наименование медицинского изделия, фирмы-производителя, фирмы-разработчика и адреса мест производства медицинского изделия.

Наименование изделия	Стельки ортопедические варианты исполнения: стельки ортопедические igli (далее по тексту возможны следующие наименования: стельки, стельки ортопедические, igli)
Производитель	medi GmbH & Co. KG (меди ГмбХ & Ко. КГ)
Разработчик	medi GmbH & Co. KG (меди ГмбХ & Ко. КГ)
Место производства	Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany

2. Варианты исполнения

Стельки ортопедические igli:

- Active (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47);
- Active Light (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47);
- Allround (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49);
- Allround Light (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47);
- Allround Light C+ (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49);
- Business Silver women (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43);
- Business Silver men (Размеры: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47);
- Comfort (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47);
- Junior (Размеры: 18/19, 20/21, 22/23, 24/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33);
- Junior Orange (Размеры: 18/19, 20/21, 22/23, 24/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33, 34/35, 36/37, 38/39);
- Junior Blue C+ (Размеры: 24/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33, 34/35, 36/37, 38/39);
- Control (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47);
- Heel Spur Light (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47);
- Slim (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47);
- Hardboot (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47);
- Style (Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43);

3. Сфера применения медицинского изделия

Назначение:

Профилактика и функциональное лечение деформаций и заболеваний стоп.

Показания к применению для стелек ортопедических:

Стельки igli можно использовать для функциональной терапии при множестве ортопедических заболеваний, например,

- Ахиллодиния
- Межпозвонковая грыжа

- Неправильное положение тазовых костей
- Омозоленность стоп
- Коксартроз
- Пяточная шпора
- Гонартроз
- Деформирующий артроз большого пальца стопы (Hallux rigidus)
- Hallux valgus
- Полая стопа
- Косолапость
- Продольное плоскостопие
- Поперечное плоскостопие
- Повреждение боковых связок голеностопного сустава
- Люмбалгия
- Маршевый перелом
- Повреждение мениска
- Метатарсалгия
- Болезнь Келлера I и II
- Болезнь Леддерхозе
- Невралгия Мортон
- Артроз таранно-пяточно-ладьевидного сустава
- Артроз голеностопного сустава
- Вальгусная деформация стопы
- Остеопороз
- Синдром миогенной латерализации надколенника
- Ретропателлярный артроз
- Ревматизм
- Приведенная стопа
- Синдром илиотибиального тракта

Относительные противопоказания:

сахарный диабет, болезнь Паркинсона, нарушения болевой чувствительности.

Побочные действия:

Возможен дискомфорт в период привыкания. Если период привыкания (дискомфорт) продлится дольше двух недель, мы рекомендуем посетить Вашего специалиста по стелькам для контроля.

4. Абсорбирующие свойства

Значение сорбционной емкости не более значений, указанных в Таблице ниже.

Наименование варианты исполнения	Сорбционная емкость (число капель/см ²)
Стельки ортопедические igli	
Active	2
Active Light	2
Allround	2
Allround Light	3
Allround Light C+	3

Business Silver women	3
Business Silver men	3
Comfort	2
Junior	3
Junior Orange	3
Junior Blue C+	3
Control	1
Heel Spur Light	3
Slim	3
Hardboot	2
Style	3

5. Описание, материалы и техническая спецификация изделий в зависимости от варианта исполнения

На изделия устанавливают уровни нагрузок, соответствующие массе пользователя: для детей и взрослых: 100 кг.

Размеры постингов:

Диаметр x высота, мм: 150 x 40; 200 x 50; 200 x 55; 200 x 80; 250 x 35; 250 x 60; 250 x 70; 250 x 100; 300 x 120; 300 x 140.

Наименование: Стельки ортопедические igli Active

Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

В проекции пятки и костей плюсны находятся специальные пелоты, амортизирующие ударные нагрузки. Для большого пальца создано специальное ложе, при этом возможность амортизации ударных нагрузок полностью сохранена. Подходят для длительных путешествий пешком.

Состав:



Черное микроволокно
(0,5 мм)

EVA* малинового цвета
(2,0 мм прибл. 30° по Шору)

PPT* серого цвета
(3,0 мм 10-15° по Шору)

PPT* синего цвета
(1,5 мм 10-15° по Шору)

PPT* синего цвета
(1,5 мм 10-15° по Шору)

Подплюсневый пелот

EVA* черного цвета
(2,0 мм прибл. 30° по Шору)

Карбоновая основа
(0,5 - 0,75 мм)

Постинги
(прибл. 42° по Шору)

Слой 1	Материал: микроволокно (65% нейлон CAS №: 9012-28-6, 35% полиуретан CAS №: 9009-54-5)
	Краситель: черный S-801538
Слой 2	Материал: этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
	Краситель: малиновый M224659
Слой 3	Материал: полиуретан PPT
	Краситель: серый S-884278
Слой 4	Материал: полиуретан PPT
	Краситель: синий S-700279
Подплюсневый пелот	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
Слой 5	Материал: этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
	Краситель: черный S-801544
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ121-35	34/35	40±2 г	24.5±1.2 см	8.2±0.4 см	2.3±0.1 см
PJ121-37	36/37	43±2.2 г	25.2±1.3 см	8.4±0.4 см	2.3±0.1 см
PJ121-39	38/39	47±2.4 г	26.5±1.3 см	8.8±0.4 см	2.3±0.1 см
PJ121-41	40/41	50±2.5 г	27.8±1.4 см	9.5±0.5 см	2.3±0.1 см
PJ121-43	42/43	54±2.7 г	29.2±1.5 см	9.7±0.5 см	2.4±0.1 см
PJ121-45	44/45	57±2.9 г	30.3±1.5 см	10±0.5 см	2.4±0.1 см
PJ121-47	46/47	60±3 г	31±1.6 см	10.5±0.5 см	2.6±0.1 см

Наименование: Стельки ортопедические igli Active Light

Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Клиновидный дизайн мягкой основы позволяет использовать стельки в узкой обуви. Узкая карбоновая основа позволяет использовать стельки в обуви с узкой подошвой.

Состав:



Черное микроволокно
(0.7 мм)



EVA¹ малинового цвета
(2.0 мм: прибл. 30° по Шору)



PPT¹ голубого цвета
(1.5 мм 10 - 15° по Шору)



TNC³ цвета металлик
(0.5 мм)



EVA¹ черного цвета
(2.0 мм: прибл. 30° по Шору)



Карбоновая основа
(0.5 - 0.75 мм, 0.75 - 1.25 мм для
размеров 45/46 и выше)



Постинги
(прибл. 42° по Шору)

Слой 1	Материал: микроволокно (65% нейлон CAS №: 9012-28-6, 35% полиуретан CAS №: 9009-54-5)
	Краситель: черный S-801538
Слой 2	Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
	Краситель: малиновый M224659
Слой 3	Материал: полиуретан PPT
	Краситель: голубой S-704897
Слой 4	Материал: тетрагидрокарбазол CAS №: 942-01-8
	Краситель: металлик S-890144
Слой 5	Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
	Краситель: черный S-801544
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ122-35	34/35	28±1.4 г	24.6±1.2 см	8.2±0.4 см	2.3±0.1 см
PJ122-37	36/37	33±1.7 г	25.4±1.3 см	8.5±0.4 см	2.3±0.1 см
PJ122-39	38/39	39±2 г	26.3±1.3 см	8.8±0.4 см	2.3±0.1 см

PJ122-41	40/41	44±2.2 г	27.9±1.4 см	9.4±0.5 см	2.4±0.1 см
PJ122-43	42/43	50±2.5 г	29.3±1.5 см	9.7±0.5 см	2.4±0.1 см
PJ122-45	44/45	55±2.8 г	30.4±1.5 см	10±0.5 см	2.4±0.1 см
PJ122-47	46/47	60±3 г	31.1±1.6 см	10.6±0.5 см	2.6±0.1 см

Наименование: Стельки ортопедические igli Allround

Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Мягкая полимерная часть толщиной 5 мм обеспечивает дополнительную поддержку и комфорт. Подплюсневый пелот эффективно поддерживает поперечный свод стопы. Углубление в проекции основания пятой плюсневой кости.

Состав:



Черное микроволокно
(0.7 мм)



Гладкий Thermosoft¹ желтого цвета
(5.0 мм; прибл. 40° по Шору)



Подплюсневый пелот

Карбоновая основа
(0.4 – 0.6 мм)

Постинги
(прибл. 42° по Шору)

Слой 1	Материал: микроволокно (65% нейлон CAS №: 9012-28-6, 35% полиуретан CAS №: 9009-54-5)
	Краситель: черный S-801538
Слой 2	Материал: полиуретан Thermosoft
	Краситель: желтый S-44446
Подплюсневый пелот	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ010-35	34/35	30±1.5 г	24.5±1.2 см	8.5±0.4 см	3±0.2 см
PJ010-37	36/37	33±1.7 г	26±1.3 см	8.8±0.4 см	3.2±0.2 см
PJ010-39	38/39	36±1.8 г	27.3±1.4 см	9.5±0.5 см	3.3±0.2 см
PJ010-41	40/41	40±2 г	28.5±1.4 см	9.7±0.5 см	3.7±0.2 см
PJ010-43	42/43	44±2.2 г	30±1.5 см	9.9±0.5 см	3.7±0.2 см
PJ010-45	44/45	48±2.4 г	30.2±1.5 см	10.3±0.5 см	3.7±0.2 см
PJ010-47	46/47	52±2.6 г	32.2±1.6 см	10.7±0.5 см	3.7±0.2 см
PJ010-49	48/49	56±2.8 г	33.7±1.7 см	11±0.6 см	3.9±0.2 см

Наименование: **Стельки ортопедические igli Allround Light / igli Allround Light C+**
Размеры igli Allround Light: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Размеры igli Allround Light C+: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49
Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Малая ширина позволяет использовать стельки в узкой обуви. Подплюсневый пелот эффективно поддерживает поперечный свод стопы. Углубление в проекции основания пятой плюсневой кости. Стельки igli Allround Light C+ имеют усиленную карбоновую основу.

Состав:



Черное микро волокно
(0,7 мм)



Vacusoft[®] белого цвета
(4,0 мм, прибл. 35° по Шору)



Подплюсневый пелот

Карбоновая основа
(0,4 – 0,6 мм igli Allround Light)
Карбоновая основа
(0,8 – 1,2 мм, igli Allround Light C+)

Постинги
(прибл. 42° по Шору)

Слой 1	Материал: микроволокно (65% нейлон CAS №: 9012-28-6, 35% полиуретан CAS №: 9009-54-5)
	Краситель: черный S-801538
Слой 2	Материал: полиуретан Vacusoft
	Краситель: белый S-26091
Подплюсневый пелот	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

igli Allround Light

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ070-35	34/35	25±1.3 г	24.7±1.2 см	8.8±0.4 см	2.7±0.1 см
PJ070-37	36/37	28±1.4 г	26±1.3 см	9±0.5 см	2.9±0.1 см
PJ070-39	38/39	31±1.6 г	27.2±1.4 см	9.3±0.5 см	3.1±0.2 см
PJ070-41	40/41	34±1.7 г	28.3±1.4 см	9.6±0.5 см	3.1±0.2 см
PJ070-43	42/43	37±1.9 г	30±1.5 см	9.9±0.5 см	3.3±0.2 см
PJ070-45	44/45	40±2 г	31.2±1.6 см	10.2±0.5 см	3.5±0.2 см
PJ070-47	46/47	43±2.2 г	32.3±1.6 см	10.7±0.5 см	3.7±0.2 см

igli Allround Light C+

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ071-35	34/35	28±1.4 г	25.3±1.3 см	8.7±0.4 см	2.5±0.1 см
PJ071-37	36/37	31±1.6 г	26±1.3 см	9±0.5 см	2.5±0.1 см
PJ071-39	38/39	34±1.7 г	26.8±1.3 см	9.2±0.5 см	2.5±0.1 см
PJ071-41	40/41	38±1.9 г	28.5±1.4 см	9.7±0.5 см	2.5±0.1 см
PJ071-43	42/43	42±2.1 г	29.6±1.5 см	10±0.5 см	2.7±0.1 см
PJ071-45	44/45	46±2.3 г	30.5±1.5 см	10.2±0.5 см	3.2±0.2 см
PJ071-47	46/47	50±2.5 г	32.6±1.6 см	10.8±0.5 см	3.5±0.2 см
PJ071-49	48/49	54±2.7 г	34±1.7 см	11±0.6 см	3.8±0.2 см

Наименование: Стельки ортопедические igli Business Silver women / igli Business Silver men

Размеры (igli Business Silver women): 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43

Размеры (igli Business Silver men): 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Малые ширина и толщина стелек позволяют использовать их в миниатюрной обуви и обуви с низким подъемом. Стельки ортопедические igli Business Silver women и igli Business Silver men отличаются формой карбоновой основы, что обусловлено типом используемой обуви.

Состав:



X-Static

PPT: голубого цвета -
мужская модель (1,5 мм)
PPT: розового цвета -
женская модель (1,5 мм)
15° по ширине

Гладкая искусственная кожа
серого цвета (0,5 мм)
Подпяточный пелот

Карбоновая основа
(0,8 - 1,2 мм)

Постинги
(гриб - 4,2° по ширине)

Слой 1	Материал: полиуретан X-Static
	Краситель: черный S-801544
Слой 2	Материал: Полиуретан PPT
	Краситель: розовый S-781028 или голубой S-704897
Слой 3	Материал: искусственная кожа (нейлон 65%; полиуретан 35%)

	Краситель: серый S-884278
Подплюсневый пелот	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

igli Business Silver women

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJD41-35	34/35	28±1.4 г	24.2±1.2 см	7.5±0.4 см	1±0.1 см
PJD41-37	36/37	32±1.6 г	25.4±1.3 см	8±0.4 см	1±0.1 см
PJD41-39	38/39	37±1.9 г	27±1.4 см	8.5±0.4 см	1±0.1 см
PJD41-41	40/41	42±2.1 г	27.8±1.4 см	9±0.5 см	1.2±0.1 см
PJD41-43	42/43	47±2.4 г	29±1.5 см	9.4±0.5 см	1.2±0.1 см

igli Business Silver men

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJH41-37	36/37	32±1.6 г	25.4±1.3 см	8±0.4 см	1±0.1 см
PJH41-39	38/39	35±1.8 г	26.8±1.3 см	9.2±0.5 см	1±0.1 см
PJH41-41	40/41	38±1.9 г	28±1.4 см	9.4±0.5 см	1±0.1 см
PJH41-43	42/43	41±2.1 г	29.4±1.5 см	9.7±0.5 см	1.2±0.1 см
PJH41-45	44/45	45±2.3 г	30.2±1.5 см	10.2±0.5 см	1.2±0.1 см
PJH41-47	46/47	49±2.5 г	31.6±1.6 см	10.5±0.5 см	1.4±0.1 см

Наименование: **Стельки ортопедические igli Comfort**

Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Дополнительный мягкий пелот от пятки до плюсневых костей обеспечивает стопе повышенный комфорт. Рельефные элементы во время ходьбы выполняют роль микромассажера, улучшая кровоснабжение стопы. Подплюсневый пелот эффективно поддерживает поперечный свод стопы.

Состав:



Слой 1	Материал: велюр (65% нейлон CAS №: 9012-28-6, 35% полиуретан CAS №: 9009-54-5)
	Краситель: бордовый S-56603
Слой 2	Материал: Полиуретан PPT
	Краситель: бежевый S-26094
Слой 3	Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
	Краситель: черный S-801544
Подплюсневый пелот	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ141-35	34/35	35±1.8 г	24.3±1.2 см	8±0.4 см	2±0.1 см
PJ141-37	36/37	41±2.1 г	25.5±1.3 см	8.4±0.4 см	2±0.1 см
PJ141-39	38/39	47±2.4 г	27±1.4 см	8.7±0.4 см	2.2±0.1 см
PJ141-41	40/41	53±2.7 г	28.2±1.4 см	9±0.5 см	2.2±0.1 см
PJ141-43	42/43	59±3 г	29.5±1.5 см	9.5±0.5 см	2.4±0.1 см
PJ141-45	44/45	65±3.3 г	30.5±1.5 см	10.3±0.5 см	2.5±0.1 см

Наименование: **Стельки ортопедические igli Junior**

Размеры: 18/19, 20/21, 22/23, 24/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Специальная форма стельки обеспечивает стабилизацию пятки и ее оптимальное положение в обуви. Гибкая карбоновая основа оказывает динамическую поддержку сводов стопы. Это позволяет сохранить подвижность в суставах стопы и укрепить мышцы стопы. Благодаря постингам эксперт по работе со стельками igli может изменить геометрию стелек для достижения максимальной эффективности на конкретном этапе лечения.

Состав:



Зеленое микроволокно
(0.7 мм)

Гладкий Thermosoft[®] красного цвета
(3.0 мм; прибл. 40° по Шору)

Карбоновая основа
(0.4 - 0.6 мм)

Постинги
(прибл. 42° по Шору)

Слой 1	Материал: микроволокно (65% нейлон CAS №: 9012-28-6, 35% полиуретан CAS №: 9009-54-5)
	Краситель: зеленый S-64605
Слой 2	Материал: полиуретан Thermosoft
	Краситель: красный S-54025
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ060-19	18/19	11±0.6 г	13.7±0.7 см	5.4±0.3 см	1.8±0.1 см
PJ060-21	20/21	12±0.6 г	14.7±0.7 см	5.6±0.3 см	2±0.1 см
PJ060-23	22/23	14±0.7 г	16±0.8 см	6.2±0.3 см	2±0.1 см
PJ060-25	24/25	16±0.8 г	17.5±0.9 см	6.5±0.3 см	2.3±0.1 см
PJ060-27	26/27	18±0.9 г	19±1 см	7±0.4 см	2.3±0.1 см
PJ060-29	28/29	20±1 г	20±1 см	7.2±0.4 см	2.3±0.1 см
PJ060-31	30/31	22±1.1 г	21.5±1.1 см	7.5±0.4 см	2.5±0.1 см
PJ060-33	32/33	24±1.2 г	23±1.2 см	7.8±0.4 см	2.5±0.1 см

Наименование: Стельки ортопедические igli Junior Orange/ igli Junior Blue C+

Размеры igli Junior Orange: 18/19, 20/21, 22/23, 24/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33, 34/35, 36/37, 38/39

Размеры igli Junior Blue C+: 24/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33, 34/35, 36/37, 38/39

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Специальная форма стельки обеспечивает стабилизацию пятки в оптимальном положении. Карбоновая основа обеспечивает надлежащую поддержку и не ограничивает движения в суставах стопы. Улучшают координацию движений, корректируют деформации стоп и нижних конечностей, исправляют походку. Обеспечивают индивидуальную коррекцию положения стопы (супинация/пронация).

Состав:



Оранжевый велюр (igli Junior Orange)
1,7 мм

Голубой велюр (igli Junior Blue C+)
1,7 мм



EVA малинового цвета (igli Junior Orange)

2,5 мм, ширина 35% по ШОР

EVA синего цвета (igli Junior Blue C+)

2,5 мм, ширина 35% по ШОР



Карбоновая основа

1,4 - 1,6 мм для igli Orange

0,8 - 1,0 мм для igli Blue C+



EVA черного цвета

1,0 мм, ширина 35% по ШОР



Постинги

1,0 мм

Слой 1	Материал: велюр (65% нейлон CAS №: 9012-28-6, 35% полиуретан CAS №: 9009-54-5)
	Краситель: оранжевый S-480242 или голубой S-704897
Слой 2	Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
	Краситель: малиновый M224659 или синий S-700279
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Слой 3	Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
	Краситель: черный S-801544
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

igli Junior Orange

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ061-19	18/19	12±0.6 г	13.7±0.7 см	5.4±0.3 см	1.9±0.1 см
PJ061-21	20/21	13±0.7 г	14.7±0.7 см	5.6±0.3 см	2.1±0.1 см
PJ061-23	22/23	14±0.7 г	16±0.8 см	6.2±0.3 см	2.1±0.1 см
PJ061-25	24/25	15±0.8 г	17.5±0.9 см	6.5±0.3 см	2.4±0.1 см
PJ061-27	26/27	16±0.8 г	19±1 см	7±0.4 см	2.5±0.1 см
PJ061-29	28/29	17±0.9 г	20±1 см	7.2±0.4 см	2.5±0.1 см
PJ061-31	30/31	18±0.9 г	21.5±1.1 см	7.5±0.4 см	2.7±0.1 см
PJ061-33	32/33	19±1 г	23±1.2 см	7.8±0.4 см	2.7±0.1 см
PJ061-35	34/35	20±1 г	24.4±1.2 см	8.2±0.4 см	2.7±0.1 см
PJ061-37	36/37	21±1.1 г	25.9±1.3 см	8.6±0.4 см	2.9±0.1 см
PJ061-39	38/39	22±1.1 г	27±1.4 см	9.2±0.5 см	2.9±0.1 см

igli Junior Blue C+

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ062-25	24/25	20±1 г	17.5±0.9 см	6.5±0.3 см	2.4±0.1 см
PJ062-27	26/27	21±1.1 г	19±1 см	7±0.4 см	2.5±0.1 см
PJ062-29	28/29	22±1.1 г	20±1 см	7.2±0.4 см	2.5±0.1 см
PJ062-31	30/31	23±1.2 г	21.5±1.1 см	7.5±0.4 см	2.7±0.1 см
PJ062-33	32/33	24±1.2 г	23±1.2 см	7.8±0.4 см	2.7±0.1 см
PJ062-35	34/35	26±1.3 г	24.4±1.2 см	8.2±0.4 см	2.7±0.1 см
PJ062-37	36/37	28±1.4 г	26±1.3 см	8.6±0.4 см	2.9±0.1 см
PJ062-39	38/39	30±1.5 г	27.1±1.4 см	9.2±0.5 см	2.9±0.1 см

Наименование: **Стельки ортопедические igli Control**

Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Пара (левая и правая стельки)



Описание: Покрытие из высококачественной козлиной кожи обеспечивает высокую степень комфорта. Углубление в проекции основания пятой плюсневой кости. Длинная карбоновая основа уменьшает амплитуду сгибания первого плюснефалангового сустава.

Состав:



Слой 1	Материал: козлиная перфорированная кожа Краситель: белый S-26091
Слой 2	Материал: полиуретан Vacufoam Краситель: белый S-26091
Подплюсневый пелот	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5 Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ020-35	34/35	29±1.5 г	24.5±1.2 см	8.5±0.4 см	2.7±0.1 см
PJ020-37	36/37	32±1.6 г	26±1.3 см	8.7±0.4 см	3±0.2 см
PJ020-39	38/39	35±1.8 г	27.4±1.4 см	9.3±0.5 см	3.1±0.2 см
PJ020-41	40/41	38±1.9 г	28.7±1.4 см	9.5±0.5 см	3.6±0.2 см
PJ020-43	42/43	41±2.1 г	30±1.5 см	9.8±0.5 см	3.6±0.2 см
PJ020-45	44/45	44±2.2 г	31.2±1.6 см	10.3±0.5 см	3.6±0.2 см
PJ020-47	46/47	47±2.4 г	32.2±1.6 см	10.5±0.5 см	3.6±0.2 см

Наименование: Стельки ортопедические igli Heel Spur Light

Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47
Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Пелот из жидкого силикона расположен на протяжении всего подошвенного апоневроза. Использование специальных материалов позволяет значительно уменьшить воздействие ударных нагрузок на кости плюсны. Тонкая полимерная основа позволяет использовать стельку в обуви с низким подъемом.

Состав:



Зеленое микроволокно
(0.7 мм)

Голубое микроволокно
(0.7 мм)

Мягкий пелот из жидкого силикона
(4.0 мм)

EVA¹ синего цвета
(6.0 мм, 10 – 15° по Шору)

Подплюсневый пелот

EVA¹ темно-синего цвета
(6.0 мм, прибл. 35° по Шору)

Карбоновая основа
(0.4 – 0.6 мм)

Постинги
(прибл. 42° по Шору)

Слой 1	Материал: микроволокно (65% нейлон CAS №: 9012-28-6, 35% полиуретан CAS №: 9009-54-5)
	Краситель: зеленый S-64605
Слой 2	Материал: микроволокно (65% нейлон CAS №: 9012-28-6, 35% полиуретан CAS №: 9009-54-5)
	Краситель: голубой S-704897
Подпяточный пелот	Материал: Силикон RAL 7035
	Краситель: голубой S-704897
Слой 3	Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
	Краситель: синий S-700279
Подплюсневый пелот	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
Слой 4	Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
	Краситель: синий S-700279
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ033-35	34/35	32±1.6 г	24.5±1.2 см	8.3±0.4 см	2.3±0.1 см
PJ033-37	36/37	34±1.7 г	25.8±1.3 см	8.5±0.4 см	2.3±0.1 см
PJ033-39	38/39	37±1.9 г	27±1.4 см	8.8±0.4 см	2.3±0.1 см
PJ033-41	40/41	40±2 г	28.3±1.4 см	9.4±0.5 см	2.5±0.1 см
PJ033-43	42/43	43±2.2 г	29.5±1.5 см	9.8±0.5 см	2.5±0.1 см
PJ033-45	44/45	46±2.3 г	31.1±1.6 см	10.3±0.5 см	2.5±0.1 см
PJ033-47	46/47	49±2.5 г	32±1.6 см	10.8±0.5 см	2.5±0.1 см

Наименование: **Стельки ортопедические igli Slim**

Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Малая ширина позволяет использовать стельки в любой узкой обуви: как в спортивной, так и в элегантной обуви из кожи. Углубление в проекции основания пятой плюсневой кости. Узкая карбоновая основа обеспечивает динамическую поддержку стопы.

Состав:



Красное микроволокно
(мм)



Vacusoft[®] белый
(4.0 мм прибл. 35° по Шору)



Карбоновая основа
(0.4 – 0.6 мм)

Постинги
(прибл. 42° по Шору)

Слой 1	Материал: микроволокно (65% нейлон CAS №: 9012-28-6, 35% полиуретан CAS №: 9009-54-5)
	Краситель: красный S-59830
Слой 2	Материал: полиуретан Vacusoft
	Краситель: белый S-26091
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ080-35	34/35	27±1.4 г	24±1.2 см	8±0.4 см	2.4±0.1 см
PJ080-37	36/37	28±1.4 г	25.6±1.3 см	8.5±0.4 см	3±0.2 см
PJ080-39	38/39	30±1.5 г	26.8±1.3 см	8.5±0.4 см	3±0.2 см
PJ080-41	40/41	32±1.6 г	28.5±1.4 см	9±0.5 см	3.1±0.2 см
PJ080-43	42/43	34±1.7 г	29.2±1.5 см	9.5±0.5 см	3.3±0.2 см
PJ080-45	44/45	36±1.8 г	31±1.6 см	10±0.5 см	3.5±0.2 см
PJ080-47	46/47	38±1.9 г	32±1.6 см	10.3±0.5 см	3.8±0.2 см

Наименование: **Стельки ортопедические igli Hardboot**

Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Мягкие пелоты обеспечивают комфортную поддержку переднего отдела стопы и пятки. Длинная карбоновая основа оптимизирует передачу усилия на каркас цельножесткой обуви.

Состав:



Thermocool¹ (0.5 мм)
+ Черное микро волокно (0.7 мм)



PPT² бежевого цвета
(3.0 мм. 10-15° по Шору)



PPT² с памятью формы голубого цвета
(3.0 мм. 10-15° по Шору)



EVA³ белого цвета
(2.0 мм; прибл. 30° по Шору)



Подпяточный



EVA³ синего цвета
(2.0 мм; прибл. 30° по Шору)

Карбоновая основа
(0.4 – 0.6 мм)

Постинги
(прибл. 42° по Шору)

Слой 1

Материал: полиуретан Thermocool

Слой 2	Краситель: черный S-801544
	Материал: полиуретан PPT
	Краситель: голубой S-704897
	Краситель: бежевый S-26094
Слой 3	Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
	Краситель: белый S-26091
Подпяточник	Материал: полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: белый S-26091
Слой 4	Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
	Краситель: синий S-700279
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5
	Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PJ182-35	34/35	33±1.7 г	24.4±1.2 см	8.1±0.4 см	1.7±0.1 см
PJ182-37	36/37	35±1.8 г	25.4±1.3 см	8.4±0.4 см	1.7±0.1 см
PJ182-39	38/39	37±1.9 г	26.9±1.3 см	8.7±0.4 см	1.8±0.1 см
PJ182-41	40/41	39±2 г	28.1±1.4 см	8.9±0.4 см	1.9±0.1 см
PJ182-43	42/43	42±2.1 г	29.6±1.5 см	9.4±0.5 см	1.9±0.1 см
PJ182-45	44/45	45±2.3 г	30.5±1.5 см	10.3±0.5 см	2.1±0.1 см
PJ182-47	46/47	47±2.4 г	31.5±1.6 см	10.5±0.5 см	2.1±0.1 см

Наименование: **Стельки ортопедические igli Style**

Размеры: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Специальная форма карбоновой основы позволяет использовать стельки в обуви с каблуком высотой до 10 см. Пелоты, расположенные в зонах наибольшей нагрузки, дополнительно амортизируют ударные нагрузки и формируют комфортное ложе для стопы.

Состав:



Материал Hydrofresh золотого цвета
(0,7 мм мм)

Пелоты
(1,5 мм, прибл. 10-15° по Шору)

Полимерная основа розового цвета
(2 мм)

Карбоновая основа
(0,5-0,7 мм)

Постинги
(прибл. 42° по Шору)

Слой 1	Материал: материал Hydrofresh
--------	-------------------------------

	Краситель: золотой S-42505
Пелоты	Материал: Полиуретан CAS №: 9009-54-5
Полимерная основа	Полиуретан CAS №: 9009-54-5 Краситель: розовый S-781028
Карбоновая основа	Карбон CAS №: 7440-44-0
Постинги	Полиуретан CAS №: 9009-54-5 Краситель: розовый S-781028 и черный S-801544

Характеристики:

Номенклатура	Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
PD053-35	34/35	27±1.4 г	23.9±1.2 см	7.7±0.4 см	2.7±0.1 см
PD053-37	36/37	31±1.6 г	25.1±1.3 см	8.1±0.4 см	2.9±0.1 см
PD053-39	38/39	35±1.8 г	26.2±1.3 см	8.5±0.4 см	3.2±0.2 см
PD053-41	40/41	40±2 г	27.2±1.4 см	9±0.5 см	3.5±0.2 см
PD053-43	42/43	45±2.3 г	28.4±1.4 см	9.5±0.5 см	3.9±0.2 см

6. Сведения о стерилизации и кратности применения

Стельки ортопедические представляют собой нестерильные изделия, предназначенные для многократного использования.

7. Упаковка и маркировка

Упаковка

Каждое изделие упаковывается в полиэтиленовый пакет и картонную коробку.

Следующая информация нанесена на картонную коробку:

- Наименование медицинского изделия
- Вариант исполнения
- Наименование и адрес производителя
- Логотип производителя
- Надпись: «Произведено в Германии»
- Состав изделия
- Дата изготовления
- Срок службы
- Гарантийный срок эксплуатации
- Рекомендации по использованию (не стирать, не сушить в сушильных машинах, не подвергать химической чистке)
- Рекомендации по утилизации (утилизировать как бытовые отходы)
- Размер
- Артикул
- Адрес для обращения в РФ
- Номер и дата регистрационного удостоверения

8. Условия хранения и транспортировки

Условия хранения: в заводской упаковке, температура помещения — 18-22°C; влажность — не более 60%.

Условия транспортировки: перевозка в мягкой или полужесткой таре. При необходимости используется обвязка, которая обеспечивает защиту упаковки и груза от повреждающего воздействия факторов внешней среды. Предпочтительна транспортировка в закрытых фургонах и/или прицепах. Допустимый диапазон температуры окружающей среды во время транспортировки: от -30°C до 40°C.

9. Условия применения и эксплуатации.

Используются пациентами по рекомендации врача, продаются в специализированных магазинах.

10. Общие рекомендации

- Используйте стельки только в обуви, для которой их адаптировал специалист.
- Регулярно извлекайте стельки из обуви для просушивания, чтобы гарантировать длительное сохранение их функциональности и эффективности.
- Не перемещайте опорные элементы (постинги) самостоятельно – этим должен заниматься только квалифицированный специалист или врач.
- Не давайте стельки детям в возрасте до 6 лет во избежание проглатывания мелких деталей.

11. Порядок работы

На основании данных клинического осмотра стоп и инструментальных исследований (компьютерная фотоплантография, подометрия и т.п.) определяется текущее состояние стоп. В зависимости от состояния стоп и типа используемой пациентом обуви выбирается оптимальная модель стелек. Рекомендации по подбору стелек в зависимости от типа обуви приведены в таблицах ниже.

Подбор стелек в зависимости от типа обуви

Тип обуви	Allround	Allround Light	Allround Light C+	Control	Heel Spur Light	Comfort	Style	Junior	Slim	Active	Active Light	Foot boot	Business Silver woman	Business Silver man
 Классические туфли		●	●				●		●				●	●
 Футбольные бутсы								●	●					
 Цельножесткая обувь									●			●		
 Туфли на каблуке до 6 см		●	●				●		●				●	
 Туфли на каблуке до 10 см							●							
 Сандалы, домашняя обувь	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
 Повседневная обувь	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
 Кроссовки		●	●			●	●	●	●	●	●		●	●
 Туристические ботинки	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		

Примечания

Указаны оптимальные пары «стелька – обувь». Возможно использование прочих комбинаций, в случае если обувь имеет сплошную подошву, достаточную высоту задника и необходимое для размещения стельки пространство в передней части стопы.

Ортопедические стельки igli на карбоновой основе можно индивидуализировать и ремоделировать с помощью постингов и дополнительных пекотов.

После выбора модели стелек определяют их размер (по размеру обуви). Затем следует уложить стельки в обувь пациента. Если мягкая основа стелек загибается, лишние участки полимерной основы отрезаются с помощью ножниц либо срезаются на точильном круге. Обрезать карбоновую основу нельзя. В случае, если карбоновая основа не позволяет плотно уложить стельки в обувь, следует подобрать другую модель. После коррекции длины мягкой основы (если таковая необходима) на стельку устанавливают постинги в соответствии с типовыми или индивидуально разработанными схемам. Типовые схемы расстановки постингов приведены ниже. Индивидуальные схемы применяются по назначению врача-ортопеда.

Постинги фиксируются на стельку с помощью клеевой основы. Высота постингов определяется индивидуально таким образом, чтобы пациент смог устойчиво стоять и ходить без нарушения координации. Через две недели после начала использования стелек пациент должен прийти к специалисту, изготовившему стельки, на контрольный осмотр. Специалист на основании субъективных ощущений клиента должен провести коррекцию положения высоты и положения постингов, если таковая необходима.

Типовые схемы расстановки постингов

О – сферический постинг

/ – клиновидный постинг

Продольное плоскостопие



Поперечное плоскостопие



Вальгусная деформация




Пяточная шпора



Полая стопа



Метатарзалгия

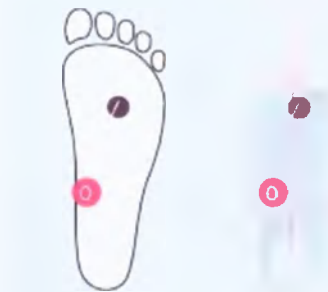

Изделия предназначены только для одного пациента.

Подбор изделия должен осуществляться квалифицированным врачом.

Необходимо использовать изделие соответствующего размера.

Установить изделие в обувь.

При использовании стелек предварительно необходимо удалить старую классическую стельку

12. Рекомендации по уходу

- Протирайте стельки влажной салфеткой только при необходимости.
- Не используйте для очистки растворители, содержащие ацетон.
- Сушите вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.

13. Срок годности/срок службы

Срок годности составляет 3 года. Срок эксплуатации составляет 2 года.

14. Информации по переработке или утилизации

Изделие можно утилизировать как обычные бытовые отходы. Рекомендуется утилизировать в соответствии с государственным регулированием как медицинские отходы класса А.

15. Гарантийные обязательства

Компания гарантирует выполнение гарантийных обязательств в случае правильного использования.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, несоблюдением условий хранения или ухода, неправильным использованием или использованием не по назначению. Гарантия прекращает действие при внесении каких-либо изменений в конструкцию стельки после ее передачи покупателю, за исключением этапной коррекции, выполняемой продавцом или лицами, получившими от продавца соответствующие полномочия. Износ материала гарантийным случаем не является.

16. Адрес/телефон/сайт организации для обращения потребителей (РФ)

ООО «МЕДИ РУС»


121609, Москва, улица Осенняя, дом 4, корп. 1, пом. П 42

Тел.: +7 (495) 374-04-56

www.medirus.ru

Signature & Stamp:

Date: 17.10.2018

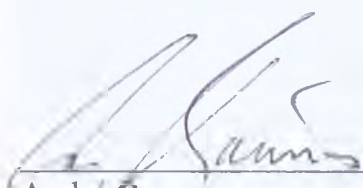

medi GmbH & Co. KG
95448 Bayreuth
Germany

André Rauner

Head of International Sales Footcare

**Инструкция по использованию для стелек
ортопедических варианты исполнения:
Стельки ортопедические medi footsupport**

1. Наименование медицинского изделия, фирмы-производителя, фирмы-разработчика и адреса мест производства медицинского изделия.

Наименование изделия	Стельки ортопедические варианты исполнения: стельки ортопедические medi footsupport (далее по тексту возможны следующие наименования: стельки, стельки ортопедические, medi footsupport)
Производитель	medi GmbH & Co. KG (меди ГмбХ & Ко. КГ)
Разработчик	medi GmbH & Co. KG (меди ГмбХ & Ко. КГ)
Место производства	Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany

2. Варианты исполнения

Стельки ортопедические medi footsupport:

- Comfort (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48);
- Comfort pro (Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48);
- Active (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48);
- Heel Spur (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48);
- Heel Spur pro (Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48);
- Ballerinas (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46);
- Ballerinas pro (Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46);
- Business (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48);
- Business pro (Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47);
- Business slim (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46);
- Business slim pro (Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46);
- Natural pro (Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48);
- Control (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50);
- Control slim (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46);
- Control multizone (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48);
- Control multizone pro (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48);
- Junior (Размеры: 19/20, 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46);
- High Heels pro (Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44);
- High Heels (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44);
- High Heels+ pro (Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44);
- High Heels+ (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44);
- Business multizone (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48);
- Business multizone pro (Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48);
- Business multizone slim (Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44);
- Business multizone slim pro (Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44);

3. Сфера применения медицинского изделия

Назначение:

Профилактика и функциональное лечение деформаций и заболеваний стоп.

Показания применения для стелек medi footsupport

- Комплексное лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степеней
- Реабилитация после травм стопы
- Функциональная недостаточность мышечно-связочного аппарата стопы, проявляющаяся при длительной статической и динамической нагрузке
- Дополнительная защита стопы при занятиях спортом, беременности, сахарном диабете

Противопоказания:

до настоящего времени не выявлены

Побочные действия:

Возможен дискомфорт в период привыкания. Если период привыкания (дискомфорт) продлится дольше двух недель, мы рекомендуем посетить Вашего специалиста по стелькам для контроля.

4. Абсорбирующие свойства

Значение сорбционной емкости не более значений, указанных в Таблице ниже.

Наименование варианты исполнения	Сорбционная емкость (число капель/см ²)
Стельки ортопедические medi footsupport	
Comfort	2
Comfort pro	2
Active	3
Heel Spur	2
Heel Spur pro	2
Ballerinas	2
Ballerinas pro	2
Business	2
Business pro	2
Business slim	2
Business slim pro	2
Natural pro	2
Control	2
Control slim	3
Control multizone	2
Control multizone pro	2
Junior	3
High Heels pro	2
High Heels	2
High Heels+ pro	2
High Heels+	2
Business multizone	2
Business multizone pro	2

Business multizone slim	2
Business multizone slim pro	2

5. Описание, материалы и техническая спецификация изделий в зависимости от варианта исполнения

На изделия устанавливают уровни нагрузок, соответствующие массе пользователя: для детей и взрослых: 100 кг.

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Active**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Зоны из различного материала для особой разгрузки ступни во время спортивных занятий.

Оптимальная поддержка продольного свода стопы.

Быстрая и простая адаптация к практически любому типу спортивной обуви.

Многослойная основа для непревзойденной поддержки свода стопы.

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель голубой S-704897
Полипропилен HIPP
Краситель белый S-26091
Полиуретан Thermosoft
Краситель белый S-26091, голубой S-704897
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель белый S-26091, голубой S-704897

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	40±2 г	25±0.5 см	8.2±0.5 см	3.2±0.5 см
37/38	41.5±2.1 г	25.5±0.5 см	8.6±0.5 см	3.2±0.5 см
39/40	45.5±2.3 г	26.5±0.5 см	9.1±0.5 см	3.3±0.5 см
41/42	48.5±2.4 г	27.9±0.5 см	9.3±0.5 см	3.3±0.5 см
43/44	56.5±2.8 г	29.5±0.5 см	9.8±0.5 см	3.5±0.5 см
45/46	59±3 г	31.2±0.5 см	10.2±0.5 см	3.6±0.5 см
47/48	62.5±3.1 г	32±0.5 см	10.5±0.5 см	3.8±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Heel Spur**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Специальная мягкая вставка под область пятки и под область подошвенного апоневроза. Многослойная основа для поддержки продольного свода стопы.

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель черный S-801538
Полипропилен HIP
Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft
Краситель синий S-700279
Полиэтилен 10803-020

Краситель черный S-801544

Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8

Краситель синий S-700279

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	32.5±1.6 г	24.5±0.5 см	8.5±0.5 см	2.9±0.5 см
37/38	36.5±1.8 г	25.8±0.5 см	8.7±0.5 см	3±0.5 см
39/40	42.5±2.1 г	27±0.5 см	9.3±0.5 см	3.2±0.5 см
41/42	45±2.3 г	28.5±0.5 см	9.6±0.5 см	3.3±0.5 см
43/44	47.5±2.4 г	29.9±0.5 см	10.2±0.5 см	3.5±0.5 см
45/46	57±2.9 г	31.4±0.5 см	10.4±0.5 см	3.6±0.5 см
47/48	57.5±2.9 г	32.5±0.5 см	10.6±0.5 см	3.7±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Heel Spur pro**

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Специальная мягкая вставка под область пятки и под область подошвенного апоневроза

Многослойная основа для поддержки продольного свода стопы

Метатарзальный валик для поддержки поперечного свода стопы.

Состав:

Нейлон Celanese

Краситель черный S-801538
Полипропилен НПП
Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft
Краситель синий S-700279
Полиэтилен 10803-020
Краситель черный S-801544
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель синий S-700279

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35	37±1.9 г	23.2±0.5 см	8±0.5 см	2.9±0.5 см
36	38±1.9 г	24.2±0.5 см	8.3±0.5 см	2.8±0.5 см
37	44±2.2 г	25.2±0.5 см	8.5±0.5 см	2.9±0.5 см
38	45±2.3 г	25.8±0.5 см	8.7±0.5 см	3±0.5 см
39	48±2.4 г	26.2±0.5 см	9±0.5 см	3.1±0.5 см
40	49±2.5 г	27±0.5 см	9.3±0.5 см	3.2±0.5 см
41	53±2.7 г	27.5±0.5 см	9.5±0.5 см	3.2±0.5 см
42	54±2.7 г	28.5±0.5 см	9.6±0.5 см	3.3±0.5 см
43	58±2.9 г	29.4±0.5 см	10±0.5 см	3.4±0.5 см
44	58.5±2.9 г	29.9±0.5 см	10.2±0.5 см	3.5±0.5 см
45	57.5±2.9 г	30.6±0.5 см	10.1±0.5 см	3.5±0.5 см
46	61±3.1 г	31.4±0.5 см	10.4±0.5 см	3.6±0.5 см
47	71±3.6 г	31.7±0.5 см	10.5±0.5 см	3.6±0.5 см
48	68±3.4 г	32.5±0.5 см	10.6±0.5 см	3.7±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Ballerinas**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Тонкая стелька для балеток и аналогичной обуви.

Многослойная основа в проекции продольного свода стопы для его поддержки.

Состав:

Латекс СКМС 30
Нейлон Celanese
Краситель малиновый M224659
Полипропилен HIPPI
Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft
Краситель малиновый M224659, черный S-801544

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	45±2.3 г	24.1±0.5 см	8.4±0.5 см	2.6±0.5 см
37/38	49±2.5 г	25.5±0.5 см	9±0.5 см	2.8±0.5 см
39/40	55±2.8 г	26.8±0.5 см	9.4±0.5 см	3±0.5 см
41/42	62±3.1 г	28.1±0.5 см	9.8±0.5 см	3.2±0.5 см
43/44	64±3.2 г	29.6±0.5 см	10.2±0.5 см	3.4±0.5 см
45/46	68±3.4 г	31.4±0.5 см	10.4±0.5 см	3.5±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Ballerinas pro**

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Тонкая стелька для балеток и аналогичной обуви.

Многослойная основа в проекции продольного свода стопы для его поддержки.

Метатарзальный валик для поддержки поперечного свода стопы.

Состав:

Латекс СКМС 30
Нейлон Celanese
Краситель малиновый M224659
Полипропилен HIPPI
Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft
Краситель малиновый M224659, черный S-801544

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35	43±2.2 г	23.6±0.5 см	8.2±0.5 см	2.5±0.5 см
36	46±2.3 г	24±0.5 см	8.4±0.5 см	2.6±0.5 см
37	48±2.4 г	24.8±0.5 см	8.6±0.5 см	2.8±0.5 см
38	50±2.5 г	25.6±0.5 см	9.1±0.5 см	2.8±0.5 см
39	53±2.7 г	26.5±0.5 см	9.1±0.5 см	2.9±0.5 см
40	55±2.8 г	26.9±0.5 см	9.3±0.5 см	3±0.5 см
41	61±3.1 г	27.4±0.5 см	9.5±0.5 см	3.1±0.5 см
42	63.5±3.2 г	28.3±0.5 см	9.7±0.5 см	3.2±0.5 см
43	64±3.2 г	29±0.5 см	10.1±0.5 см	3.3±0.5 см
44	66±3.3 г	29.6±0.5 см	10.2±0.5 см	3.4±0.5 см
45	66±3.3 г	30.6±0.5 см	10.4±0.5 см	3.4±0.5 см
46	69±3.5 г	31.4±0.5 см	10.5±0.5 см	3.5±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Business**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Высококачественное велюровое покрытие для комфортного ощущения при использовании.

Многослойная основа для поддержки продольного свода стопы.

Целевая амортизация особенно нагруженных зон.

Комфортное использование в деловой обуви.

Состав:

Нейлон Celanese

Краситель черный S-801538

Полипропилен HIP
Краситель белый S-26091
Полиуретан Thermosoft
Краситель синий S-700279, черный S-801544
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель синий S-700279

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	46.5±2.3 г	24.2±0.5 см	8.4±0.5 см	2.6±0.5 см
37/38	49±2.5 г	25±0.5 см	8.6±0.5 см	2.8±0.5 см
39/40	51±2.6 г	25.7±0.5 см	9±0.5 см	2.8±0.5 см
41/42	53±2.7 г	26.5±0.5 см	9.1±0.5 см	2.9±0.5 см
43/44	55.5±2.8 г	27±0.5 см	9.4±0.5 см	3±0.5 см
45/46	60.5±3 г	27.5±0.5 см	9.5±0.5 см	3.1±0.5 см
47/48	63.5±3.2 г	28.3±0.5 см	9.8±0.5 см	3.2±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Business pro**

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Высококачественное велюровое покрытие для комфортного ощущения при использовании.

Многослойная основа для поддержки продольного свода стопы.

Целевая амортизация особенно нагруженных зон.

Комфортное использование в деловой обуви.

Интегрированная плюсовая подушка для поддержки поперечного свода стопы

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель черный S-801538
Полипропилен HIP
Краситель белый S-26091
Полиуретан Thermosoft
Краситель синий S-700279, черный S-801544
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8

Краситель синий S-700279

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35	44±2.2 г	23.8±0.5 см	8.2±0.5 см	2.5±0.5 см
36	46.5±2.3 г	24.2±0.5 см	8.4±0.5 см	2.6±0.5 см
37	49±2.5 г	25±0.5 см	8.6±0.5 см	2.8±0.5 см
38	51±2.6 г	25.7±0.5 см	9±0.5 см	2.8±0.5 см
39	53±2.7 г	26.5±0.5 см	9.1±0.5 см	2.9±0.5 см
40	55.5±2.8 г	27±0.5 см	9.4±0.5 см	3±0.5 см
41	60.5±3 г	27.5±0.5 см	9.5±0.5 см	3.1±0.5 см
42	63.5±3.2 г	28.3±0.5 см	9.8±0.5 см	3.2±0.5 см
43	64±3.2 г	29.1±0.5 см	10.2±0.5 см	3.3±0.5 см
44	67±3.4 г	29.7±0.5 см	10.2±0.5 см	3.4±0.5 см
45	66.5±3.3 г	30.8±0.5 см	10.4±0.5 см	3.4±0.5 см
46	71±3.6 г	31.6±0.5 см	10.4±0.5 см	3.5±0.5 см
47	73±3.7 г	32±0.5 см	10.5±0.5 см	3.5±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Business slim**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Высококачественное велюровое покрытие для комфортного ощущения при использовании.
Многослойная основа.

Для поддержки продольного свода стопы.
Целевая амортизация особенно нагруженных зон.
Комфортное использование в деловой обуви.

Состав:

Нейлон Celanese Краситель бежевый S-26094
Полипропилен HIPР Краситель бежевый S-26094
Полиуретан Thermosoft Краситель синий S-700279, бежевый S-26094
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8 Краситель синий S-700279

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	46.5±2.3 г	24.2±0.5 см	8.4±0.5 см	2.6±0.5 см
37/38	51±2.6 г	25.7±0.5 см	9±0.5 см	2.8±0.5 см
39/40	55.5±2.8 г	27±0.5 см	9.4±0.5 см	3±0.5 см
41/42	63.5±3.2 г	28.3±0.5 см	9.8±0.5 см	3.2±0.5 см
43/44	67±3.4 г	29.7±0.5 см	10.2±0.5 см	3.4±0.5 см
45/46	71±3.6 г	31.6±0.5 см	10.4±0.5 см	3.5±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Business slim pro**

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Высококачественное велюровое покрытие для комфортного ощущения при использовании.
Многослойная основа.

Для поддержки продольного свода стопы.

Целевая амортизация особенно нагруженных зон.

Комфортное использование в деловой обуви.

Интегрированная плюсовая подушка для поддержки поперечного свода стопы

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель бежевый S-26094
Полипропилен HIPPI
Краситель бежевый S-26094
Полиуретан Thermosoft
Краситель синий S-700279, бежевый S-26094
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель синий S-700279

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35	44±2.2 г	23.8±0.5 см	8.2±0.5 см	2.5±0.5 см
36	46.5±2.3 г	24.2±0.5 см	8.4±0.5 см	2.6±0.5 см
37	49±2.5 г	25±0.5 см	8.6±0.5 см	2.8±0.5 см
38	51±2.6 г	25.7±0.5 см	9±0.5 см	2.8±0.5 см
39	53±2.7 г	26.5±0.5 см	9.1±0.5 см	2.9±0.5 см
40	55.5±2.8 г	27±0.5 см	9.4±0.5 см	3±0.5 см
41	60.5±3 г	27.5±0.5 см	9.5±0.5 см	3.1±0.5 см
42	63.5±3.2 г	28.3±0.5 см	9.8±0.5 см	3.2±0.5 см
43	64±3.2 г	29.1±0.5 см	10.2±0.5 см	3.3±0.5 см
44	67±3.4 г	29.7±0.5 см	10.2±0.5 см	3.4±0.5 см
45	66.5±3.3 г	30.8±0.5 см	10.4±0.5 см	3.4±0.5 см
46	71±3.6 г	31.6±0.5 см	10.4±0.5 см	3.5±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Natural pro**

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Высококачественное кожаное покрытие обеспечивает исключительное ощущение комфорта при использовании.

Изящный дизайн для обуви с ограниченным внутренним пространством.

Плюсовая подушка в форме капли для поддержки поперечного свода стопы.

Стелька имеет специальную форму для поддержки продольного свода стопы.

Состав:

Натуральная козлиная белая перфорированная кожа
Полипропилен HIPР
Краситель бежевый S-26094

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35	47.5±2.4 г	23±0.5 см	7.8±0.5 см	2.6±0.5 см
36	50±2.5 г	24.3±0.5 см	8.2±0.5 см	2.7±0.5 см
37	52.5±2.6 г	25.2±0.5 см	8.4±0.5 см	2.7±0.5 см
38	57±2.9 г	25.8±0.5 см	8.5±0.5 см	2.7±0.5 см
39	56.5±2.8 г	26.2±0.5 см	8.8±0.5 см	2.7±0.5 см
40	61.5±3.1 г	27±0.5 см	8.8±0.5 см	2.8±0.5 см
41	62±3.1 г	27.4±0.5 см	9±0.5 см	2.9±0.5 см
42	58.5±2.9 г	28±0.5 см	9.1±0.5 см	3±0.5 см
43	63.5±3.2 г	29.4±0.5 см	9.5±0.5 см	3±0.5 см
44	71.5±3.6 г	30±0.5 см	9.7±0.5 см	3.1±0.5 см
45	74.5±3.7 г	30.6±0.5 см	10±0.5 см	3.1±0.5 см
46	77±3.9 г	31.4±0.5 см	10.1±0.5 см	3.1±0.5 см
47	77.5±3.9 г	31.7±0.5 см	10.2±0.5 см	3.1±0.5 см
48	87±4.4 г	32±0.5 см	10.3±0.5 см	3.2±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Control**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Высококачественное велюровое покрытие для большего комфорта

Удлиненная основа стабилизирует 1-й плюснефаланговый сустав и поддерживает продольный свод стопы.

Тонкая стелька для использования в обуви с низким подъемом.

Состав:

Нейлон Celanese Краситель бежевый S-26094
Полипропилен HIPР Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft Краситель малиновый M224659, бежевый S-26094
Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8 Краситель малиновый M224659

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	47.5±2.4 г	24±0.5 см	8.1±0.5 см	3±0.5 см
37/38	53.5±2.7 г	25.5±0.5 см	8.6±0.5 см	3.1±0.5 см
39/40	57±2.9 г	26.5±0.5 см	9.1±0.5 см	3.2±0.5 см
41/42	62.5±3.1 г	27.9±0.5 см	9.3±0.5 см	3.2±0.5 см
43/44	65±3.3 г	29.5±0.5 см	9.8±0.5 см	3.5±0.5 см
45/46	77.5±3.9 г	31.2±0.5 см	10.2±0.5 см	3.6±0.5 см
47/48	85±4.3 г	32±0.5 см	10.5±0.5 см	3.8±0.5 см
49/50	90±4.5 г	32.8±0.5 см	11±0.5 см	3.9±0.5 см

Наименование: Стельки ортопедические medi footsupport Control slim

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Разгрузка плюсна-фалангового сустава большого пальца.

Высококачественное велюровое покрытие для комфортного ощущения при использовании.

Удлиненная база для стабилизации плюсна-фалангового сустава большого пальца и поддержки продольного свода стопы.

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель бежевый S-26094
Полипропилен HIPP
Краситель черный S-801544
Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель бежевый S-26094, малиновый M224659
Полиуретан Thermosoft
Краситель малиновый M224659, бежевый S-26094

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	47.5±2.4 г	24±0.5 см	8.1±0.5 см	3±0.5 см
37/38	53.5±2.7 г	25.5±0.5 см	8.6±0.5 см	3.1±0.5 см
39/40	57±2.9 г	26.5±0.5 см	9.1±0.5 см	3.2±0.5 см
41/42	62.5±3.1 г	27.9±0.5 см	9.3±0.5 см	3.2±0.5 см
43/44	65±3.3 г	29.5±0.5 см	9.8±0.5 см	3.5±0.5 см
45/46	77.5±3.9 г	31.2±0.5 см	10.2±0.5 см	3.6±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Control multizone**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Поддержка продольного свода стопы.

Быстрая и простая адаптация к практически любому типу повседневной с полуспортивной обуви.

Многослойная основа

Состав:

Нейлон Celanese

Краситель черный S-801538

Полипропилен HIPP

Краситель черный S-801544

Полиуретан Thermosoft

Краситель черный S-801544, серый S-884278

Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8

Краситель черный S-801544, серый S-884278

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	47.5±2.4 г	24±0.5 см	8.1±0.5 см	3±0.5 см
37/38	53.5±2.7 г	25.5±0.5 см	8.6±0.5 см	3.1±0.5 см
39/40	57±2.9 г	26.5±0.5 см	9.1±0.5 см	3.2±0.5 см
41/42	62.5±3.1 г	27.9±0.5 см	9.3±0.5 см	3.2±0.5 см
43/44	65±3.3 г	29.5±0.5 см	9.8±0.5 см	3.5±0.5 см

45/46	77.5±3.9 г	31.2±0.5 см	10.2±0.5 см	3.6±0.5 см
47/48	85±4.3 г	32±0.5 см	10.5±0.5 см	3.8±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Control multizone pro**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Поддержка продольного свода стопы.

Быстрая и простая адаптация к практически любому типу повседневной с полуспортивной обуви.

Многослойная основа.

Плюсневая подушка в форме капли для поддержки поперечного свода стопы.

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель черный S-801538
Полипропилен HIPP
Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft
Краситель черный S-801544, серый S-884278
Материал: Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель черный S-801544, серый S-884278

Характеристики:


Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
--------	------------------------	-----------	------------	------------

35/36	47.5±2.4 г	24±0.5 см	8.1±0.5 см	3±0.5 см
37/38	53.5±2.7 г	25.5±0.5 см	8.6±0.5 см	3.1±0.5 см
39/40	57±2.9 г	26.5±0.5 см	9.1±0.5 см	3.2±0.5 см
41/42	62.5±3.1 г	27.9±0.5 см	9.3±0.5 см	3.2±0.5 см
43/44	65±3.3 г	29.5±0.5 см	9.8±0.5 см	3.5±0.5 см
45/46	77.5±3.9 г	31.2±0.5 см	10.2±0.5 см	3.6±0.5 см
47/48	85±4.3 г	32±0.5 см	10.5±0.5 см	3.8±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Junior**

Размеры: 19/20, 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Пара (левый и правый стельки)

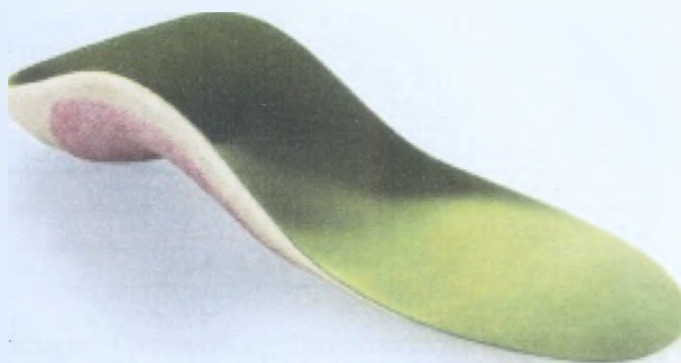

Описание:

Специальная форма для стабилизации пятки в физиологическом положении
 Многослойная основа для оптимальной поддержки продольного свода стопы, как при ходьбе, так и в положении стоя.
 Специальное покрытие на нижней поверхности стельки предотвращает ее смещение внутри обуви.

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель зеленый S-64800
Полипропилен HIPPI
Краситель малиновый M224659
Полиуретан Thermosoft
Краситель зеленый S-64800, белый S-26091
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель белый S-26091

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
19/20	17.5±0.9 г	14±0.5 см	5.5±0.5 см	3±0.5 см
21/22	19.5±1 г	15±0.5 см	6±0.5 см	3.3±0.5 см
23/24	21.5±1.1 г	16.5±0.5 см	6.4±0.5 см	3.5±0.5 см
25/26	25±1.3 г	17.4±0.5 см	6.5±0.5 см	3.5±0.5 см
27/28	28.5±1.4 г	19±0.5 см	6.8±0.5 см	3.8±0.5 см
29/30	32.5±1.6 г	20±0.5 см	7.3±0.5 см	4±0.5 см
31/32	37±1.9 г	21.3±0.5 см	8±0.5 см	4.2±0.5 см
33/34	41.5±2.1 г	22.5±0.5 см	8±0.5 см	4.4±0.5 см
35/36	47.5±2.4 г	24.5±0.5 см	8.5±0.5 см	4.5±0.5 см
37/38	52.5±2.6 г	25.9±0.5 см	9±0.5 см	4.6±0.5 см
39/40	57.5±2.9 г	26.8±0.5 см	9.5±0.5 см	4.8±0.5 см
41/42	59±3 г	28.5±0.5 см	9.6±0.5 см	5±0.5 см
43/44	67.5±3.4 г	29.5±0.5 см	10±0.5 см	5.2±0.5 см
45/46	70.5±3.5 г	31.4±0.5 см	10.5±0.5 см	5.5±0.5 см

Наименование: Стельки ортопедические medi footsupport High Heels pro

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Пара (левый и правый стельки)



Описание:

Специальная форма стельки для поддержки сводов стопы при использовании в обуви на высоком каблуке.

Многослойная структура в средней части для лучшей поддержки сводов стопы.

Метатарзальный валик для поддержки поперечного свода стопы.

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель черный S-95782
Полипропилен HIPPI
Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft
Краситель черный S-801544, малиновый M224659
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель черный S-801544, малиновый M224659

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35	34±1.7 г	23.5±0.5 см	8±0.5 см	3±0.5 см
36	35.5±1.8 г	24±0.5 см	8.1±0.5 см	3±0.5 см
37	37.5±1.9 г	24.7±0.5 см	8.2±0.5 см	3±0.5 см
38	39.5±2 г	25.4±0.5 см	8.3±0.5 см	3.1±0.5 см
39	41.5±2.1 г	26.1±0.5 см	8.5±0.5 см	3.1±0.5 см
40	44±2.2 г	26.6±0.5 см	8.6±0.5 см	3.3±0.5 см
41	45±2.3 г	27.4±0.5 см	8.8±0.5 см	3.4±0.5 см
42	49±2.5 г	28.1±0.5 см	9±0.5 см	3.7±0.5 см
43	50.5±2.5 г	28.5±0.5 см	9.1±0.5 см	3.8±0.5 см
44	54±2.7 г	29.1±0.5 см	9.2±0.5 см	3.9±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport High Heels**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

Пара (левый и правый стельки)



Описание:

Специальная форма стельки для поддержки сводов стопы при использовании в обуви на высоком каблуке.

Многослойная структура в средней части для лучшей поддержки сводов стопы.

Состав:

Нейлон Celanese Краситель черный S-801538
Полипропилен HIPPI Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft Краситель черный S-95782, малиновый M224659
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8 Краситель черный S-801544, малиновый M224659

Характеристики:


Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	33.5±1.7 г	24±0.5 см	8.1±0.5 см	2.5±0.5 см
37/38	37.5±1.9 г	25.5±0.5 см	8.4±0.5 см	2.6±0.5 см
39/40	45±2.3 г	27±0.5 см	8.7±0.5 см	2.8±0.5 см
41/42	49.5±2.5 г	27.8±0.5 см	8.7±0.5 см	3±0.5 см

43/44	54.5±2.7 г	29.5±0.5 см	9.2±0.5 см	3.2±0.5 см
-------	------------	-------------	------------	------------

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport High Heels+ pro**

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Пара (левый и правый стельки)

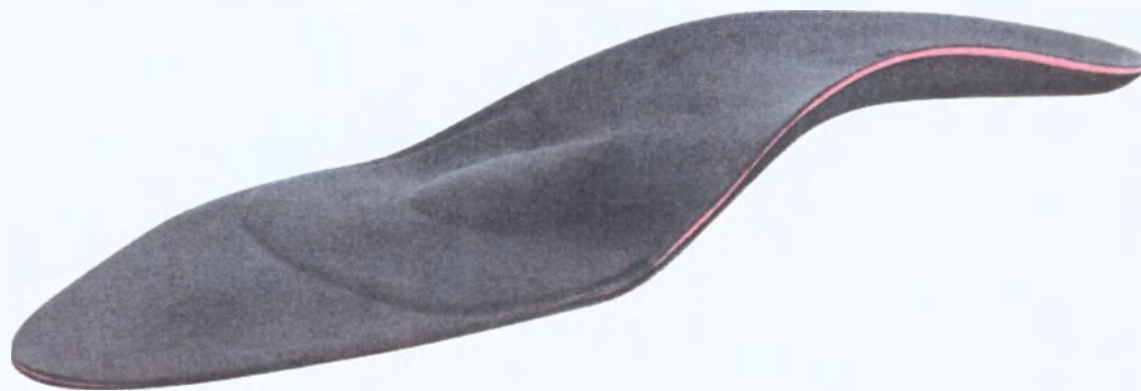

Описание:

Специальная форма стельки для поддержки сводов стопы при использовании в обуви на высоком каблуке.

Многослойная структура в средней части для лучшей поддержки сводов стопы.

Метатарзальный валик для поддержки поперечного свода стопы.

Специальное покрытие для большего комфорта.

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель черный S-801538
Полипропилен HIPР
Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft
Краситель черный S-801544, малиновый M224659
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель черный S-801544, малиновый M224659

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35	34±1.7 г	23.5±0.5 см	8±0.5 см	3±0.5 см
36	35.5±1.8 г	24±0.5 см	8.1±0.5 см	3±0.5 см
37	37.5±1.9 г	24.7±0.5 см	8.2±0.5 см	3±0.5 см
38	39.5±2 г	25.4±0.5 см	8.3±0.5 см	3.1±0.5 см
39	41.5±2.1 г	26.1±0.5 см	8.5±0.5 см	3.1±0.5 см
40	44±2.2 г	26.6±0.5 см	8.6±0.5 см	3.3±0.5 см
41	45±2.3 г	27.4±0.5 см	8.8±0.5 см	3.4±0.5 см
42	49±2.5 г	28.1±0.5 см	9±0.5 см	3.7±0.5 см

43	50.5±2.5 г	28.5±0.5 см	9.1±0.5 см	3.8±0.5 см
44	54±2.7 г	29.1±0.5 см	9.2±0.5 см	3.9±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport High Heels+**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

Пара (левый и правый стельки)



Описание:

Специальная форма стельки для поддержки сводов стопы при использовании в обуви на высоком каблуке.

Многослойная структура в средней части для лучшей поддержки сводов стопы.

Специальное покрытие для большего комфорта.

Состав:

Нейлон Celanese Краситель черный S-801538
Полипропилен HIP Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft Краситель черный S-801544, малиновый M224659
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8 Краситель черный S-801544, малиновый M224659

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	35.5±1.8 г	24±0.5 см	8.1±0.5 см	3±0.5 см
37/38	39.5±2 г	25.4±0.5 см	8.3±0.5 см	3.1±0.5 см
39/40	44±2.2 г	26.6±0.5 см	8.6±0.5 см	3.3±0.5 см
41/42	49±2.5 г	28.1±0.5 см	9±0.5 см	3.7±0.5 см
43/44	54±2.7 г	29.1±0.5 см	9.2±0.5 см	3.9±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Business multizone**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Пара (левый и правый стельки)



Описание:

Поддержка продольного свода стопы.

Быстрая и простая адаптация к практически любому типу модельной обуви.

Многослойная основа.

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель черный S-801538
Полипропилен HIPPI
Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft
Краситель черный S-801544, малиновый M224659
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель черный S-801544, малиновый M224659

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	28±1.4 г	23.9±0.5 см	8.1±0.5 см	2.3±0.5 см
37/38	31±1.6 г	25.4±0.5 см	8.3±0.5 см	2.4±0.5 см
39/40	34±1.7 г	26.6±0.5 см	8.6±0.5 см	2.5±0.5 см

41/42	38±1.9 г	27.6±0.5 см	8.8±0.5 см	2.7±0.5 см
43/44	41±2.1 г	29.1±0.5 см	9.2±0.5 см	2.8±0.5 см
45/46	44.5±2.2 г	30.6±0.5 см	9.8±0.5 см	3±0.5 см
47/48	50±2.5 г	32±0.5 см	10.1±0.5 см	3.1±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Business multizone pro**

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Поддержка продольного свода стопы.

Быстрая и простая адаптация к практически любому типу модельной обуви.

Метатарзальный валик для поддержки поперечного свода стопы.

Многослойная основа.

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель черный S-801538
Полипропилен HIPPI
Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft
Краситель черный S-801544, малиновый M224659
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель черный S-801544, малиновый M224659

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35	27.5±1.4 г	23.5±0.5 см	8±0.5 см	2.2±0.5 см
36	28±1.4 г	23.9±0.5 см	8.1±0.5 см	2.3±0.5 см
37	29±1.5 г	24.7±0.5 см	8.2±0.5 см	2.3±0.5 см
38	31±1.6 г	25.4±0.5 см	8.3±0.5 см	2.4±0.5 см
39	32.5±1.6 г	26.1±0.5 см	8.5±0.5 см	2.5±0.5 см

40	34±1.7 г	26.6±0.5 см	8.6±0.5 см	2.5±0.5 см
41	37±1.9 г	27.4±0.5 см	8.8±0.5 см	2.6±0.5 см
42	38±1.9 г	27.6±0.5 см	8.8±0.5 см	2.7±0.5 см
43	39.5±2 г	28.5±0.5 см	9.1±0.5 см	2.7±0.5 см
44	41±2.1 г	29.1±0.5 см	9.2±0.5 см	2.8±0.5 см
45	41.5±2.1 г	30±0.5 см	9.4±0.5 см	2.8±0.5 см
46	44.5±2.2 г	30.6±0.5 см	9.8±0.5 см	3±0.5 см
47	46.5±2.3 г	31.5±0.5 см	9.9±0.5 см	3.1±0.5 см
48	50±2.5 г	32±0.5 см	10.1±0.5 см	3.1±0.5 см

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Business multizone slim**

Размеры: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

Пара (левый и правый стельки)



Описание:

Поддержка продольного свода стопы.

Созданы для использования в узкой обуви.

Многослойная основа.

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель черный S-801538
Полипропилен HIPPI
Краситель черный S-801544
Полиуретан Thermosoft
Краситель черный S-801544, малиновый M224659
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель черный S-801544, малиновый M224659

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35/36	26.5±1.3 г	23.8±0.5 см	7.4±0.5 см	2±0.5 см
37/38	29±1.5 г	25±0.5 см	7.8±0.5 см	2.1±0.5 см
39/40	30.5±1.5 г	26±0.5 см	8.2±0.5 см	2.3±0.5 см
41/42	35.5±1.8 г	27.8±0.5 см	8.6±0.5 см	2.5±0.5 см

43/44	38.5±1.9 г	29±0.5 см	9.3±0.5 см	2.5±0.5 см
-------	------------	-----------	------------	------------

Наименование: **Стельки ортопедические medi footsupport Business multizone slim pro**

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Поддержка продольного свода стопы.

Созданы для использования в узкой обуви.

Метатарзальный валик для поддержки поперечного свода стопы.

Многослойная основа.

Состав:

Нейлон Celanese
Краситель бежевый S-26094
Полипропилен HIPР
Краситель бежевый S-26094
Полиуретан Thermosoft
Краситель бежевый S-26094, синий S-700279
Этиленвинилацетат (EVA) CAS №: 24937-78-8
Краситель бежевый S-26094, синий S-700279

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
35	25±1.3 г	23±0.5 см	7±0.5 см	2±0.5 см
36	26.5±1.3 г	23.8±0.5 см	7.4±0.5 см	2±0.5 см

37	27.5±1.4 г	24.5±0.5 см	7.5±0.5 см	2±0.5 см
38	29±1.5 г	25±0.5 см	7.8±0.5 см	2.1±0.5 см
39	29.5±1.5 г	25.8±0.5 см	7.8±0.5 см	2.2±0.5 см
40	30.5±1.5 г	26±0.5 см	8.2±0.5 см	2.3±0.5 см
41	34±1.7 г	27±0.5 см	8.4±0.5 см	2.4±0.5 см
42	35.5±1.8 г	27.8±0.5 см	8.6±0.5 см	2.5±0.5 см
43	37.5±1.9 г	28.4±0.5 см	9.2±0.5 см	2.5±0.5 см
44	38.5±1.9 г	29±0.5 см	9.3±0.5 см	2.5±0.5 см

6. Порядок работы

Изделия предназначены только для одного пациента.

Подбор изделия должен осуществляться квалифицированным врачом.

Необходимо использовать изделие соответствующего размера.

Установить изделие в обувь.

При использовании стелек предварительно необходимо удалить старую классическую стельку.

7. Сведения о стерилизации и кратности применения

Стельки ортопедические представляют собой нестерильные изделия, предназначенные для многократного использования.

8. Упаковка и маркировка

Упаковка

Каждое изделие упаковывается в полиэтиленовый пакет и картонную коробку.

Следующая информация нанесена на картонную коробку:

- Наименование медицинского изделия
- Вариант исполнения
- Наименование и адрес производителя
- Логотип производителя
- Надпись «Произведено в Германии»
- Состав изделия
- Дата изготовления
- Срок службы
- Гарантийный срок эксплуатации
- Рекомендации по использованию (не стирать, не сушить в сушильных машинах, не подвергать химической чистке)
- Рекомендации по утилизации (утилизировать как бытовые отходы)
- Размер
- Артикул
- Адрес для обращения в РФ
- Номер и дата регистрационного удостоверения

9. Условия хранения и транспортировки

Условия хранения: в заводской упаковке, температура помещения – 18-22°C; влажность – не более 60%.

Условия транспортировки: перевозка в мягкой или полужесткой таре. При необходимости используется обвязка, которая обеспечивает защиту упаковки и груза от повреждающего воздействия факторов внешней среды. Предпочтительна транспортировка в закрытых фургонах и/или прицепах. Допустимый диапазон температуры окружающей среды во время транспортировки: от -30°C до 40°C.

10. Условия применения и эксплуатации.

Используются пациентами по рекомендации врача, продаются в специализированных магазинах.

11. Рекомендации по использованию

Стельки вкладываются в стандартную обувь с закрытой пяткой. Период адаптации стопы к новым стелькам составляет около двух недель. При появлении/усилении болевых ощущений следует прекратить использование стелек и проконсультироваться у Вашего врача.

12. Рекомендации по уходу

- Масла, лосьоны и мази могут повредить материал изделия.
- При загрязнении стельки следует протирать мягкой тканью, смоченной бытовым моющим средством.
- Сушить при температуре 20-25 °С.
- Не сушите изделие в сушильной машине, на батарее или на солнце.
- Не гладьте.
- Не используйте растворители для выведения пятен.
- Не подвергайте химической чистке.

13. Срок годности/срок службы

Срок годности составляет 3 года. Срок эксплуатации составляет 2 года.

14. Информации по переработке или утилизации

Изделие можно утилизировать как обычные бытовые отходы. Рекомендуется утилизировать в соответствии с государственным регулированием как медицинские отходы класса А.

15. Гарантийные обязательства

Компания гарантирует выполнение гарантийных обязательств в случае правильного использования.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, несоблюдением условий хранения или ухода, неправильным использованием или использованием не по назначению. Гарантия прекращает действие при внесении каких-либо изменений в конструкцию стельки после ее передачи покупателю, за исключением этапной коррекции, выполняемой продавцом или лицами, получившими от продавца соответствующие полномочия. Износ материала гарантийным случаем не является.

16. Адрес/телефон/сайт организации для обращения потребителей (РФ)

ООО «МЕДИ РУС»


121609, Москва, улица Осенняя, дом 4, корп. 1, пом. П 42

Тел.: +7 (495) 374-04-56

[www. medirus.ru](http://www.medirus.ru)

Signature & Stamp:

Date: 17.10.2018

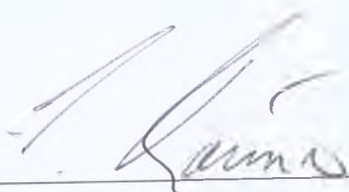

medi GmbH & Co. KG
95448 Bayreuth
Germany

André Rauner

Head of International Sales Footcare

**Инструкция по использованию для
Стелек ортопедических protect.Silicone insole**

1. Наименование медицинского изделия, фирмы-производителя, фирмы-разработчика и адреса мест производства медицинского изделия.

Наименование изделия	Стельки ортопедические, варианты исполнения: Стельки ортопедические protect.Silicone insole (далее по тексту возможны следующие наименования: стельки, стельки ортопедические, protect.Silicone insole)
Производитель	medi GmbH & Co. KG (меди ГмбХ & Ко. КГ)
Разработчик	medi GmbH & Co. KG (меди ГмбХ & Ко. КГ)
Место производства	Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany

2. Сфера применения медицинского изделия

Назначение:

Профилактика и функциональное лечение деформаций и заболеваний стоп.

Показания для стелек protect.Silicone insole

- Болезненность при нагрузке на подошвенную часть стопы
- Деформация плюсны и пальцев ног
- Боли в суставах (артралгия)

Противопоказания:

до настоящего времени не выявлены.

Побочные действия:

Возможен дискомфорт в период привыкания. Если период привыкания (дискомфорт) продлится дольше двух недель, мы рекомендуем посетить Вашего специалиста по стелькам для контроля.

3. Описание, материалы и техническая спецификация изделия

На изделия устанавливают уровни нагрузок, соответствующие массе пользователя: для детей и взрослых: 100 кг.

Сорбционная емкость: не более 1 капли/см²

Наименование: Стельки **ортопедические protect.Silicone insole**

Размеры: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Пара (левая и правая стельки)



Описание:

Стельки силиконовые медицинские с амортизирующими вставками. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения стопы; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Состав:

Силикон	RAL 7035
Краситель синий	S-700279

Характеристики:

Размер	Масса одной стельки, г	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
37/38	195±9.8 г	25.3±0.5 см	9±0.5 см	1.9±0.5 см
39/40	235±11.8 г	26.6±0.5 см	9.4±0.5 см	2±0.5 см
41/42	265±13.3 г	28±0.5 см	9.8±0.5 см	2±0.5 см
43/44	280±14 г	29.5±0.5 см	10.2±0.5 см	2.1±0.5 см
45/46	350±17.5 г	31.2±0.5 см	10.4±0.5 см	2.1±0.5 см

4. Порядок работы

Изделия предназначены только для одного пациента.

Подбор изделия должен осуществляться квалифицированным врачом.

Необходимо использовать изделие соответствующего размера.

Установить изделие в обувь.

При использовании стелек предварительно необходимо удалить старую классическую стельку.

5. Сведения о стерилизации и кратности применения

Стельки ортопедические представляют собой нестерильные изделия, предназначенные для многократного использования.

6. Упаковка и маркировка

Упаковка

Каждое изделие упаковывается в полиэтиленовый пакет и картонную коробку.

Следующая информация нанесена на картонную коробку:

- Наименование медицинского изделия
- Вариант исполнения
- Наименование и адрес производителя
- Логотип производителя
- Надпись «Произведено в Германии»
- Состав изделия
- Дата изготовления
- Срок службы
- Гарантийный срок эксплуатации
- Рекомендации по использованию (не стирать, не сушить в сушильных машинах, не подвергать химической чистке)
- Рекомендации по утилизации (утилизировать как бытовые отходы)
- Размер
- Артикул
- Адрес для обращения в РФ
- Номер и дата регистрационного удостоверения

7. Условия хранения и транспортировки

Условия хранения: в заводской упаковке, температура помещения – 18-22°C; влажность - не более 60%.

Условия транспортировки: перевозка в мягкой или полужесткой таре. При необходимости используется обвязка, которая обеспечивает защиту упаковки и груза от повреждающего воздействия факторов внешней среды. Предпочтительна транспортировка в закрытых фургонах и/или прицепах. Допустимый диапазон температуры окружающей среды во время транспортировки: от -30°C до 40°C.

8. Условия применения и эксплуатации.

Используются пациентами по рекомендации врача, продаются в специализированных магазинах.

9. Рекомендации по применению

- Стельки необходимо применять исключительно для ортезного лечения стоп при отсутствии повреждений на коже.
- Вложите стельки в Вашу обувь (при необходимости уберите уже имеющиеся в обуви стельки)
- Убедитесь, что стельки вложены в оба ботинка (за исключением компенсации разницы длины нижних конечностей)
- Стельки можно использовать для ходьбы и во время занятий спортом, в повседневной, а также в рабочей обуви.

10. Рекомендации по уходу

- **Стельки ортопедические protect.Silicone insole**
 - Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.
 - Изделия необходимо мыть вручную в теплом растворе моющих средств.
 - Не сушить на батарее отопления.

11. Срок годности/срок службы

Срок годности составляет 3 года. Срок эксплуатации составляет 2 года.

12. Информации по переработке или утилизации

Изделие можно утилизировать как обычные бытовые отходы. Рекомендуется утилизировать в соответствии с государственным регулированием как медицинские отходы класса А.

13. Гарантийные обязательства

Компания гарантирует выполнение гарантийных обязательств в случае правильного использования.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, несоблюдением условий хранения или ухода, неправильным использованием или использованием не по назначению. Гарантия прекращает действие при внесении каких-либо изменений в конструкцию стельки после ее передачи покупателю, за исключением этапной коррекции, выполняемой продавцом или лицами, получившими от продавца соответствующие полномочия. Износ материала гарантийным случаем не является.

14. Адрес/телефон/сайт организации для обращения потребителей (РФ)

ООО «МЕДИ РУС»


121609, Москва, улица Осенняя, дом 4, корп. 1, пом. П 42

Тел.: +7 (495) 374-04-56

[www. medirus.ru](http://www.medirus.ru)

Signature & Stamp:

Date: 17.10.2018

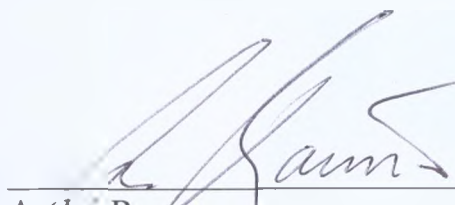

medi GmbH & Co. KG
95448 Bayreuth
Germany

André Rayner

Head of International Sales Footcare

Urk.Rolle Nr. M **1724** **/ 2018**
F / HW

I hereby certify that this document was signed in my presence by

Mr. André R a u n e r,
born on 18. March 1976,
identified by his identity card,
business address: D-95448 Bayreuth/GERMANY,
Medicusstraße 1,

according to his statement here acting of

**medi GmbH & Co. KG,
D-95448 Bayreuth/GERMANY, Medicusstraße 1.**

The document consisting of 70 pages.

Bayreuth, 17th October 2018

Markus Eberl, Notar



Стр. 64

Подпись и штамп:

Дата: 17.10.2018 г.

/Подпись/

Андре Раунер (Andre Rauner)
Глава отдела международных продаж товаров
для ухода за ногами

/Штамп:

«меди ГмбХ энд Ко. КГ»
(medi GmbH & Co. KG)
95448 Байройт
Германия
(95448 Bayreuth
Germany)/

Стр. 69

Подпись и штамп:

Дата: 17.10.2018 г.

/Подпись/

Андре Раунер (Andre Rauner)
Глава отдела международных продаж товаров
для ухода за ногами

/Штамп:

«меди ГмбХ энд Ко. КГ»
95448 Байройт
Германия

Стр. 70

Номер в нотариальном реестре М - 1724 / 2018

F / HW

Я настоящим удостоверяю, что данный документ был подписан в моем присутствии

г-ном Андре Раунером,
18 марта 1976 года рождения,
личность которого была установлена на основании удостоверения личности,
служебный адрес: D-95448 Байройт/ГЕРМАНИЯ, Медикусштрассе 1
(D-95448 Bayreuth/GERMANY, Medicusstraße 1),

по его утверждению действующим от имени компании

**«меди ГмбХ энд Ко. КГ»
D-95448 Байройт/ГЕРМАНИЯ, Медикусштрассе 1.**

Документ состоит из 70 страниц.

Байройт, 17^е октября 2018 г.

/Подпись/

Маркус Эберль (Markus Eberl), нотариус

*/Рельефный оттиск печати на самоклеящемся лейбле: Нотариус Маркус Эберль * Байройт/*

47354

Кирюш

Российская Федерация
Город Москва
Пятнадцатое ноября две тысячи восемнадцатого года

Я, Кубасов Игорь Евгеньевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кирюшатовой Ольги Андреевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/293-Н/77-2018- *Н 1488*

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.



(подпись нотариуса)

И.Е. Кубасов
(инициалы, фамилия нотариуса)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
141/ссылка лист(а)ов
Нотариус