

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Стимул+»



С.В.Колоколов

2019 г.

**БОРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ С АЛМАЗНЫМИ ГОЛОВКАМИ
«СТИМУЛ» ПО ТУ 32.50.11-013-65512780-2018**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Введена впервые

Дата введения – «22» марта 2019 г.

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование – боры стоматологические с алмазными головками «Стимул» по ТУ 32.50.11-013-65512780-2018 (в дальнейшем – боры)

2 СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Стимул+» (ООО «Стимул+»)

Адрес: 420088, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 54, оф.403

Телефон: +7(843) 561-15-46

Факс: +7(843)567-15-19

E-mail: stimul_116@mail.ru

3 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Стимул+» (ООО «Стимул+»)

Адрес: 420088, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 54, оф.403

Телефон: +7(843) 561-15-46

Факс: +7(843)567-15-19

E-mail: stimul_116@mail.ru

4 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Для обработки твердых тканей зуба, коронок, зубных пломб при работе с зубоорудными наконечниками в клинических условиях.

Боры используются квалифицированными медицинскими работниками и специалистами, связанными со сферой здравоохранения.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

5.1 Боры представляют собой вращающийся стоматологический инструмент, изготовленные из стали марки 20Х13 или 30Х13 (ГОСТ 5632-2014) с алмазным слоем на рабочей части, состоящего из алмазного порошка марки АС32 (ГОСТ 9206-80) и гальванической никелевой связи марки НПА1 (ГОСТ 492-2006). Непосредственно на хвостовик позади рабочей части, за пределами посадочной длины может быть нанесено цветовое кодирование алкидной (полиэфирной) эмалью марки ПФ-115 «Универсал» (ТУ 2312-003-76174671-2005) жёлтого, красного синего, зелёного или чёрного цвета.

5.2 Боры изготавливаются следующих вариантов исполнения:

1. Бор сферический (круглый):

836.204.001.018.018,	856.204.001.023.023,	866.204.001.012.012,	866.204.001.014.014,
866.204.001.016.016,	866.204.001.018.018,	866.204.001.021.021,	866.204.001.023.023,
866.204.001.025.025,	866.204.001.029.029,	866.204.001.035.035,	876.204.001.012.012,
876.204.001.014.014,	876.204.001.016.016,	876.204.001.018.018,	876.204.001.021.021,
876.204.001.023.023,	876.204.001.025.025,	876.204.001.029.029,	876.204.001.035.035,
866.205.001.014.014,	866.205.001.016.016,	866.205.001.018.018,	866.205.001.021.021,
866.205.001.023.023,	866.205.001.025.025,	876.205.001.014.014,	876.205.001.016.016,
876.205.001.018.018,	876.205.001.021.021,	876.205.001.023.023,	876.205.001.025.025,
836.206.001.014.014,	856.206.001.014.014,	866.206.001.014.014,	876.206.001.014.014,
886.206.001.014.014,	836.206.001.018.018,	856.206.001.018.018,	866.206.001.018.018,
876.206.001.018.018,	886.206.001.018.018,	836.206.001.023.023,	856.206.001.023.023,
866.206.001.023.023,	876.206.001.023.023,	886.206.001.023.023,	836.206.001.027.027,
856.206.001.027.027,	866.206.001.027.027,	876.206.001.027.027,	886.206.001.027.027,
836.206.001.033.033,	856.206.001.033.033,	866.206.001.033.033,	876.206.001.033.033,
886.206.001.033.033,	836.206.001.035.035,	856.206.001.035.035,	866.206.001.035.035,
876.206.001.035.035,	886.206.001.035.035,	866.104.001.009.009,	866.104.001.010.010,
866.104.001.012.012,	866.104.001.014.014,	866.104.001.016.016,	866.104.001.018.018,
866.104.001.021.021,	866.104.001.023.023,	866.104.001.025.025,	866.104.001.027.027,
866.104.001.029.029,	866.104.001.033.033,	866.104.001.035.035,	866.104.001.042.042,

866.104.001.050.050,	876.104.001.012.012,	876.104.001.014.014,	876.104.001.016.016,
876.104.001.018.018,	876.104.001.021.021,	876.104.001.023.023,	876.104.001.025.025,
876.104.001.027.027,	876.104.001.029.029,	876.104.001.033.033,	876.104.001.035.035,
876.104.001.042.042,	876.104.001.050.050,	886.104.001.012.012,	886.104.001.014.014,
886.104.001.016.016,	886.104.001.018.018,	886.104.001.021.021,	886.104.001.023.023,
886.104.001.025.025,	886.104.001.027.027,	886.104.001.029.029,	886.104.001.033.033,
886.104.001.035.035,	886.104.001.042.042,	886.104.001.050.050,	856.313.001.014.014,
866.313.001.014.014,	876.313.001.014.014,	886.313.001.014.014,	836.314.001.010.010,
836.314.001.012.012,	836.314.001.014.014,	836.314.001.016.016,	836.314.001.018.018,
836.314.001.023.023,	856.314.001.007.007,	856.314.001.008.008,	856.314.001.010.010,
856.314.001.012.012,	856.314.001.014.014,	856.314.001.016.016,	856.314.001.018.018,
856.314.001.021.021,	856.314.001.023.023,	856.314.001.025.025,	856.314.001.035.035,
866.314.001.007.007,	866.314.001.008.008,	866.314.001.010.010,	866.314.001.012.012,
866.314.001.014.014,	866.314.001.016.016,	866.314.001.018.018,	866.314.001.021.021,
866.314.001.023.023,	866.314.001.025.025,	866.314.001.035.035,	876.314.001.010.010,
876.314.001.012.012,	876.314.001.014.014,	876.314.001.016.016,	876.314.001.018.018,
876.314.001.021.021,	876.314.001.023.023,	876.314.001.025.025,	876.314.001.035.035,
886.314.001.012.012,	886.314.001.014.014,	886.314.001.016.016,	886.314.001.018.018,
886.314.001.021.021,	886.314.001.023.023,	886.314.001.025.025,	886.314.001.035.035,
856.316.001.100.010,	856.316.001.100.012,	856.316.001.100.014,	856.316.001.100.016,
856.316.001.100.018,	866.316.001.100.010,	866.316.001.100.012,	866.316.001.100.014,
866.316.001.100.016,	866.316.001.100.018,	866.316.001.100.021,	866.316.001.100.023,
876.316.001.100.010,	876.316.001.100.012,	876.316.001.100.014,	876.316.001.100.016,
876.316.001.100.018,	876.316.001.100.021,	876.316.001.100.023,	886.316.001.100.010,
886.316.001.100.012,	886.316.001.100.014,	886.316.001.100.016,	886.316.001.100.018,
886.316.001.100.021,	886.316.001.100.023,		

2. Бор сферический (круглый) с буртиком, стандартный:

866.104.002.025.016,	866.104.002.025.018,	876.104.002.025.016,	876.104.002.025.018,
866.314.002.025.010,	866.314.002.025.012,	866.314.002.025.014,	866.314.002.025.016,
866.314.002.025.018,	876.314.002.025.012,	876.314.002.025.014,	876.314.002.025.016,
876.314.002.025.018,	886.314.002.025.012,	886.314.002.025.014,	886.314.002.025.016,
886.314.002.025.018,			

3. Бор сферический длинная шейка:

856.314.004.050.007,	856.314.004.050.010,	856.314.004.050.012,	856.314.004.050.014,
856.314.004.050.016,	856.314.004.050.018,	856.314.004.050.021,	856.314.004.050.023,
856.314.004.050.025,	866.314.004.050.007,	866.314.004.050.010,	866.314.004.050.012,
866.314.004.050.014,	866.314.004.050.016,	866.314.004.050.018,	866.314.004.050.021,
866.314.004.050.023,	866.314.004.050.025,	876.314.004.050.010,	876.314.004.050.012,
876.314.004.050.014,	876.314.004.050.016,	876.314.004.050.018,	876.314.004.050.021,
876.314.004.050.023,	876.314.004.050.025,	886.314.004.050.010,	886.314.004.050.012,
886.314.004.050.014,	886.314.004.050.016,	886.314.004.050.018,	886.314.004.050.021,
886.314.004.050.023,	886.314.004.050.025,		

4. Бор обратноконусный:

866.104.010.020.009,	866.104.010.020.010,	866.104.010.035.012,	866.104.010.035.014,
866.104.010.035.016,	866.104.010.040.018,	866.104.010.040.021,	866.104.010.040.023,
866.104.010.040.025,	866.104.010.040.040,	866.104.010.040.050,	876.104.010.035.012,
876.104.010.035.014,	876.104.010.035.016,	876.104.010.040.018,	876.104.010.040.021,
876.104.010.040.023,	876.104.010.040.025,	876.104.010.040.040,	876.104.010.050.050,
886.104.010.035.012,	886.104.010.035.014,	886.104.010.035.016,	886.104.010.040.018,
886.104.010.040.021,	886.104.010.040.023,	886.104.010.040.025,	886.104.010.040.040,
886.104.010.050.050,	866.204.225.524.018,	866.104.225.040.014,	866.104.225.040.016,
866.104.225.040.018,	866.104.225.040.021,	866.104.225.040.023,	876.104.225.040.014,
876.104.225.040.016,	876.104.225.040.018,	876.104.225.040.021,	876.104.225.040.023,

886.104.225.040.014,	886.104.225.040.016,	886.104.225.040.018,	886.104.225.040.021,
886.104.225.040.023,	856.313.010.020.010,	866.313.010.020.010,	876.313.010.020.010,
866.314.010.035.012,	876.313.012.035.012,	886.313.012.035.012,	856.314.012.007.010,
856.314.012.010.012,	856.314.012.011.014,	856.314.012.015.016,	856.314.012.018.018,
866.314.012.007.010,	866.314.012.010.012,	866.314.012.011.014,	866.314.012.015.016,
866.314.012.018.018,	876.314.012.007.010,	876.314.012.010.012,	876.314.012.011.014,
876.314.012.015.016,	876.314.012.018.018,	876.314.012.019.021,	886.314.012.010.012,
886.314.012.011.014,	886.314.012.015.016,	886.314.012.018.018,	886.314.012.019.021,
856.314.225.030.012,	856.314.225.040.014,	856.314.225.040.016,	856.314.225.040.018,
866.314.225.030.012,	866.314.225.040.014,	866.314.225.040.016,	866.314.225.040.018,
876.314.225.040.012,	876.314.225.040.014,	876.314.225.040.016,	876.314.225.040.018,
886.314.225.040.014,	886.314.225.040.016,	886.314.225.040.018,	

5. Бор обратноконусный с буртиком:

866.104.019.035.012,	866.104.019.040.018,	866.104.019.040.023,	876.104.019.035.012,
876.104.019.040.018,	876.104.019.040.023,	886.104.019.035.012,	886.104.019.040.018,
886.104.019.040.023,	866.313.019.035.014,	886.313.019.035.014,	856.314.019.025.012,
856.314.019.025.016,	866.314.019.025.012,	866.314.019.025.014,	876.314.019.025.012,
876.314.019.025.014,	876.314.019.025.016,	876.314.019.025.018,	886.314.019.025.012,
886.314.019.025.014,	886.314.019.025.016,	886.314.019.025.018,	

6. Бор цилиндрический, резание боковое и концевое:

866.204.108.030.012,	866.204.111.080.014,	866.104.108.030.012,	866.104.108.030.016,
866.104.108.030.018,	866.104.108.030.035,	876.104.108.030.012,	876.104.108.030.016,
876.104.108.030.018,	876.104.108.030.035,	886.104.108.030.012,	886.104.108.030.016,
886.104.108.030.018,	886.104.108.030.035,	866.104.110.060.012,	866.104.110.060.014,
866.104.110.060.016,	866.104.110.060.027,	866.104.110.060.050,	866.104.110.060.055,
866.104.110.060.060,	876.104.110.060.012,	876.104.110.060.014,	876.104.110.060.016,
876.104.110.060.027,	876.104.110.060.050,	876.104.110.060.055,	876.104.110.060.060,
886.104.110.060.012,	886.104.110.060.014,	886.104.110.060.016,	886.104.110.060.027,
886.104.110.060.050,	886.104.110.060.055,	886.104.110.060.060,	866.104.111.080.012,
866.104.111.080.014,	866.104.111.080.016,	866.104.111.080.025,	866.104.111.080.027,
866.104.111.080.040,	866.104.111.080.050,	866.104.111.080.055,	866.104.111.080.060,
876.104.111.080.012,	876.104.111.080.014,	876.104.111.080.016,	876.104.111.080.025,
876.104.111.080.027,	876.104.111.080.040,	876.104.111.080.050,	876.104.111.080.055,
876.104.111.080.060,	886.104.111.080.012,	886.104.111.080.014,	886.104.111.080.016,
886.104.111.080.025,	886.104.111.080.027,	886.104.111.080.040,	886.104.111.080.050,
886.104.111.080.055,	886.104.111.080.060,	856.313.108.030.010,	866.313.108.030.010,
876.313.108.030.010,	876.313.108.030.012,	886.313.108.030.010,	836.314.108.030.012,
836.314.108.030.014,	836.314.108.030.016,	856.314.108.030.008,	856.314.108.030.010,
856.314.108.030.012,	856.314.108.030.014,	856.314.108.030.016,	866.314.108.030.008,
866.314.108.030.010,	866.314.108.030.012,	866.314.108.030.014,	866.314.108.030.016,
876.314.108.030.008,	876.314.108.030.010,	876.314.108.030.012,	876.314.108.030.014,
876.314.108.030.016,	886.314.108.030.010,	886.314.108.030.012,	886.314.108.030.014,
886.314.108.030.016,	836.314.110.060.010,	836.314.110.060.012,	836.314.110.060.014,
836.314.110.060.016,	856.314.110.060.010,	856.314.110.060.012,	856.314.110.060.014,
856.314.110.060.016,	856.314.110.060.018,	866.314.110.060.010,	866.314.110.060.012,
866.314.110.060.014,	866.314.110.060.016,	866.314.110.060.018,	876.314.110.060.010,
876.314.110.060.012,	876.314.110.060.014,	876.314.110.060.016,	876.314.110.060.018,
886.314.110.060.010,	886.314.110.060.012,	886.314.110.060.014,	886.314.110.060.016,
886.314.110.060.018,	836.314.111.080.010,	836.314.111.080.012,	836.314.111.080.014,
856.314.111.080.010,	856.314.111.080.012,	856.314.111.080.014,	856.314.111.080.016,
866.314.111.080.010,	866.314.111.080.012,	866.314.111.080.014,	866.314.111.080.016,
876.314.111.080.010,	876.314.111.080.012,	876.314.111.080.014,	876.314.111.080.016,
886.314.111.080.012,	886.314.111.080.014,	886.314.111.080.016,	856.314.112.100.012,
856.314.112.100.014,	866.314.112.100.012,	866.314.112.100.014,	876.314.112.100.012,

876.314.112.100.014,	886.314.112.100.014,	856.314.113.120.014,	866.314.113.120.014,
876.314.113.120.014,	886.314.113.120.014,		

7. Бор цилиндрический, острый конец:

866.104.130.080.014,	866.104.130.080.016,	876.104.130.080.014,	876.104.130.080.016,
886.104.130.080.014,	886.104.130.080.016,	836.314.130.080.010,	836.314.130.080.012,
836.314.130.080.014,	856.314.130.080.010,	856.314.130.080.012,	856.314.130.080.014,
856.314.130.080.016,	866.314.130.080.010,	866.314.130.080.012,	866.314.130.080.014,
866.314.130.080.016,	876.314.130.080.010,	876.314.130.080.012,	876.314.130.080.014,
876.314.130.080.016,	886.314.130.080.010,	886.314.130.080.012,	886.314.130.080.014,
886.314.130.080.016,	836.314.131.100.012,	836.314.131.100.014,	836.314.131.100.016,
856.314.131.100.012,	856.314.131.100.014,	856.314.131.100.016,	866.314.131.100.012,
866.314.131.100.014,	866.314.131.100.016,	876.314.131.100.012,	876.314.131.100.014,
876.314.131.100.016,	886.314.131.100.014,	886.314.131.100.016,	

8. Бор цилиндрический, полусферический конец:

866.104.142.100.014,	866.104.142.100.016,	866.104.142.100.018,	866.104.142.100.025,
876.104.142.100.014,	876.104.142.100.016,	876.104.142.100.018,	876.104.142.100.025,
886.104.142.100.014,	886.104.142.100.016,	886.104.142.100.018,	886.104.142.100.025,
856.314.138.030.007,	866.314.138.030.007,	836.314.140.060.014,	856.314.140.060.010,
856.314.140.060.012,	856.314.140.060.014,	856.314.140.060.016,	866.314.140.060.010,
866.314.140.060.012,	866.314.140.060.014,	866.314.140.060.016,	876.314.140.060.010,
876.314.140.060.012,	876.314.140.060.014,	876.314.140.060.016,	886.314.140.060.010,
886.314.140.060.012,	886.314.140.060.014,	886.314.140.060.016,	856.314.141.080.010,
856.314.141.080.012,	856.314.141.080.014,	856.314.141.080.016,	866.314.141.080.010,
866.314.141.080.012,	866.314.141.080.014,	866.314.141.080.016,	876.314.141.080.010,
876.314.141.080.012,	876.314.141.080.014,	876.314.141.080.016,	886.314.141.080.010,
886.314.141.080.012,	886.314.141.080.014,	886.314.141.080.016,	886.314.141.080.018,
836.314.142.100.012,	836.314.142.100.016,	856.314.142.100.010,	856.314.142.100.012,
856.314.142.100.014,	856.314.142.100.016,	866.314.142.100.010,	866.314.142.100.012,
866.314.142.100.014,	866.314.142.100.016,	876.314.142.100.010,	876.314.142.100.012,
876.314.142.100.014,	886.314.142.100.012,	886.314.142.100.014,	886.314.142.100.016,

9. Бор конусный, заостренный:

836.314.160.080.008,	856.314.160.080.008,	856.314.160.080.010,	866.314.160.080.008,
866.314.160.080.010,	876.314.160.080.008,	876.314.160.080.010,	

10. Бор конусный, заостренный тонкий:

866.204.165.080.014,	866.204.166.100.010,	866.204.166.100.014,	866.104.165.080.014,
866.104.165.080.018,	876.104.165.080.014,	876.104.165.080.018,	886.104.165.080.014,
886.104.165.080.018,	866.104.166.100.018,	866.104.166.100.025,	876.104.166.100.018,
876.104.166.100.025,	886.104.166.100.018,	886.104.166.100.025,	836.314.164.040.010,
836.314.164.040.012,	836.314.164.040.014,	836.314.164.040.016,	856.314.164.040.010,
856.314.164.040.012,	856.314.164.040.014,	856.314.164.040.016,	856.314.164.040.018,
866.314.164.040.012,	866.314.164.040.014,	866.314.164.040.016,	866.314.164.040.018,
876.314.164.040.010,	876.314.164.040.012,	876.314.164.040.014,	876.314.164.040.016,
876.314.164.040.018,	886.314.164.040.012,	886.314.164.040.014,	886.314.164.040.016,
886.314.164.040.018,	836.314.165.080.010,	836.314.165.080.012,	836.314.165.080.014,
856.314.165.080.010,	856.314.165.080.012,	856.314.165.080.014,	856.314.165.080.016,
866.314.165.080.010,	866.314.165.080.012,	866.314.165.080.014,	866.314.165.080.016,
866.314.165.080.018,	876.314.165.080.010,	876.314.165.080.012,	876.314.165.080.014,
876.314.165.080.016,	886.314.165.080.012,	886.314.165.080.014,	886.314.165.080.016,
836.314.166.100.010,	836.314.166.100.012,	836.314.166.100.014,	836.314.166.100.016,
836.314.166.100.018,	856.314.166.100.010,	856.314.166.100.012,	856.314.166.100.014,
856.314.166.100.016,	856.314.166.100.018,	866.314.166.100.010,	866.314.166.100.012,
866.314.166.100.014,	866.314.166.100.016,	866.314.166.100.018,	866.314.166.100.021,
876.314.166.100.010,	876.314.166.100.012,	876.314.166.100.014,	876.314.166.100.016,

876.314.166.100.018,	876.314.166.100.021,	886.314.166.100.012,	886.314.166.100.014,
886.314.166.100.016,	886.314.166.100.018.		

11. Бор конусный (усеченный конусный):

866.104.169.030.009,	866.104.169.030.010,	866.104.169.030.012,	866.104.169.030.016,
866.104.169.030.018,	876.104.169.030.009,	876.104.169.030.010,	876.104.169.030.012,
876.104.169.030.016,	876.104.169.030.018,	886.104.169.030.009,	886.104.169.030.010,
886.104.169.030.012,	886.104.169.030.016,	886.104.169.030.018,	866.104.172.080.016,
866.104.172.080.018,	866.104.172.080.025,	866.104.172.080.033,	866.104.172.080.040,
866.104.172.080.050,	876.104.172.080.016,	876.104.172.080.018,	876.104.172.080.025,
876.104.172.080.033,	876.104.172.080.040,	876.104.172.080.050,	886.104.172.080.016,
886.104.172.080.018,	886.104.172.080.025,	886.104.172.080.033,	886.104.172.080.040,
886.104.172.080.050,	836.314.171.060.012,	856.314.171.060.012,	866.314.171.060.012,
866.314.171.060.014,	876.314.171.060.012,	886.314.171.060.012,	836.314.172.080.012,
836.314.172.080.014,	836.314.172.080.018,	856.314.172.080.010,	856.314.172.080.012,
856.314.172.080.014,	856.314.172.080.016,	856.314.172.080.018,	866.314.172.080.010,
866.314.172.080.012,	866.314.172.080.014,	866.314.172.080.016,	866.314.172.080.018,
876.314.172.080.010,	876.314.172.080.012,	876.314.172.080.014,	876.314.172.080.016,
876.314.172.080.018,	886.314.172.080.012,	886.314.172.080.014,	886.314.172.080.016,
886.314.172.080.018,	836.314.173.100.012,	836.314.173.100.014,	836.314.173.100.018,
856.314.173.100.010,	856.314.173.100.012,	856.314.173.100.014,	856.314.173.100.016,
856.314.173.100.018,	856.314.173.100.021,	856.314.173.100.023,	866.314.173.100.010,
866.314.173.100.012,	866.314.173.100.014,	866.314.173.100.016,	866.314.173.100.018,
866.314.173.100.021,	866.314.173.100.023,	876.314.173.100.010,	876.314.173.100.012,
876.314.173.100.014,	876.314.173.100.016,	876.314.173.100.018,	876.314.173.100.021,
876.314.173.100.023,	886.314.173.100.012,	886.314.173.100.014,	886.314.173.100.016,
886.314.173.100.018,	886.314.173.100.021,	886.314.173.100.023,	876.314.174.120.014,
886.314.174.120.016.			

12. Бор конусный, куполообразный (полусферический) конец:

866.104.198.080.016,	866.104.198.080.023,	866.104.198.080.025,	866.104.198.080.027,
866.104.198.080.033,	866.104.198.080.035,	866.104.198.080.040,	876.104.198.080.016,
876.104.198.080.023,	876.104.198.080.025,	876.104.198.080.027,	876.104.198.080.033,
876.104.198.080.035,	876.104.198.080.040,	886.104.198.080.016,	886.104.198.080.023,
886.104.198.080.025,	886.104.198.080.027,	886.104.198.080.033,	886.104.198.080.035,
886.104.198.080.040,	856.314.197.060.010,	856.314.197.060.012,	856.314.197.060.014,
856.314.197.060.016,	856.314.197.060.018,	866.314.197.060.010,	866.314.197.060.012,
866.314.197.060.018,	876.314.197.060.010,	876.314.197.060.012,	876.314.197.060.014,
876.314.197.060.016,	876.314.197.060.018,	886.314.197.060.012,	886.314.197.060.014,
886.314.197.060.016,	886.314.197.060.018,	836.314.198.080.012,	836.314.198.080.014,
836.314.198.080.016,	836.314.198.080.018,	856.314.198.080.012,	856.314.198.080.014,
856.314.198.080.016,	856.314.198.080.018,	866.314.198.080.012,	866.314.198.080.014,
866.314.198.080.016,	866.314.198.080.018,	866.314.198.080.025,	876.314.198.080.012,
876.314.198.080.014,	876.314.198.080.016,	876.314.198.080.018,	876.314.198.080.021,
876.314.198.080.025,	886.314.198.080.012,	886.314.198.080.014,	886.314.198.080.016,
886.314.198.080.018,	886.314.198.080.023,	886.314.198.080.025,	836.314.199.100.010,
836.314.199.100.012,	836.314.199.100.016,	836.314.199.100.018,	856.314.199.100.010,
856.314.199.100.012,	856.314.199.100.014,	856.314.199.100.016,	856.314.199.100.018,
866.314.199.100.010,	866.314.199.100.012,	866.314.199.100.014,	866.314.199.100.016,
866.314.199.100.018,	876.314.199.100.010,	876.314.199.100.012,	876.314.199.100.014,
876.314.199.100.016,	876.314.199.100.018,	886.314.199.100.010,	886.314.199.100.012,
886.314.199.100.014,	886.314.199.100.016,	886.314.199.100.018	

13. Бор конусный, куполообразный конец, только боковое резание:

856.314.220.100.012,	856.314.220.100.014,	866.314.220.100.014,	876.314.220.100.012,
876.314.220.100.014,	886.314.220.100.014.		

14. Бор обратноконусный, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая:

866.104.232.020.016,	876.104.232.020.016,	886.104.232.020.016,	866.314.232.020.010,
876.314.232.020.010.			

15. Бор в форме груши:

856.314.237.030.014,	866.314.237.030.012,	866.314.237.030.014,	866.314.237.030.016,
866.314.237.030.018,	876.314.237.030.014,	876.314.237.030.016,	876.314.237.030.018,
886.314.237.030.014,	886.314.237.030.018,	856.314.238.070.012,	866.314.238.070.010,
876.314.238.070.014.			

16. Бор в форме пламени, стандартный:

876.104.243.080.012,	886.104.243.080.012,	856.313.243.080.010,	866.313.243.080.010,
876.313.243.080.010,	886.313.243.080.010,	836.314.243.080.010,	836.314.243.080.018,
856.314.243.080.010,	856.314.243.080.012,	856.314.243.080.014,	856.314.243.080.016,
856.314.243.080.018,	856.314.243.080.025,	866.314.243.080.010,	866.314.243.080.012,
866.314.243.080.014,	866.314.243.080.016,	866.314.243.080.018,	866.314.243.080.025,
876.314.243.080.010,	876.314.243.080.012,	876.314.243.080.014,	876.314.243.080.016,
876.314.243.080.018,	886.314.243.080.010,	886.314.243.080.012,	886.314.243.080.014,
886.314.243.080.016,	886.314.243.080.018,	886.314.243.080.025.	

17. Бор цилиндрический, стрелчатый конец, длинный:

866.104.249.080.010,	866.104.249.080.012,	866.104.249.080.014,	866.104.249.080.016,
866.104.249.080.018,	866.104.249.080.021,	876.104.249.080.010,	876.104.249.080.012,
876.104.249.080.014,	876.104.249.080.016,	876.104.249.080.018,	876.104.249.080.021,
886.104.249.080.010,	886.104.249.080.012,	886.104.249.080.014,	886.104.249.080.016,
886.104.249.080.018,	886.104.249.080.021,	866.104.251.120.014,	866.104.251.120.018,
866.104.251.120.060,	876.104.251.120.014,	876.104.251.120.018,	876.104.251.120.060,
886.104.251.120.014,	886.104.251.120.018,	886.104.251.120.060,	866.104.250.100.012,
836.314.249.080.010,	836.314.249.080.012,	836.314.249.080.014,	836.314.249.080.016,
856.314.249.080.010,	856.314.249.080.012,	856.314.249.080.014,	856.314.249.080.016,
856.314.249.080.018,	866.314.249.080.010,	866.314.249.080.012,	866.314.249.080.014,
866.314.249.080.016,	866.314.249.080.018,	876.314.249.080.010,	876.314.249.080.012,
876.314.249.080.014,	876.314.249.080.016,	876.314.249.080.018,	886.314.249.080.010,
886.314.249.080.012,	886.314.249.080.014,	886.314.249.080.016,	886.314.249.080.018,
836.314.250.100.012,	836.314.250.100.014,	836.314.250.100.016,	836.314.250.100.018,
856.314.250.100.010,	856.314.250.100.012,	856.314.250.100.014,	856.314.250.100.016,
856.314.250.100.018,	866.314.250.100.010,	866.314.250.100.012,	866.314.250.100.014,
866.314.250.100.016,	866.314.250.100.018,	876.314.250.100.010,	876.314.250.100.012,
876.314.250.100.014,	876.314.250.100.016,	876.314.250.100.018,	886.314.250.100.010,
886.314.250.100.012,	886.314.250.100.014,	886.314.250.100.016,	886.314.250.100.018,
836.314.251.120.012,	836.314.251.120.016,	856.314.251.120.012,	856.314.251.120.014,
856.314.251.120.016,	856.314.251.120.018,	866.314.251.120.012,	866.314.251.120.014,
866.314.251.120.016,	866.314.251.120.018,	876.314.251.120.012,	876.314.251.120.014,
876.314.251.120.016,	876.314.251.120.018,	886.314.251.120.012,	886.314.251.120.014,
886.314.251.120.016,	886.314.251.120.018.		

18. Бор в форме почки:

866.104.254.050.014,	876.104.254.050.014,	886.104.254.050.014,	836.314.254.050.016,
856.314.254.050.016,	856.314.254.050.018,	866.314.254.050.014,	866.314.254.050.016,
866.314.254.050.018,	876.314.254.050.016,	876.314.254.050.014,	876.314.254.050.018.

19. Бор в форме почки, тонкий:

866.104.257.030.012,	866.104.257.030.016,	866.104.257.030.023,	876.104.257.030.012,
876.104.257.030.016,	876.104.257.030.023,	886.104.257.030.012,	886.104.257.030.016,
836.314.257.030.014,	836.314.257.030.016,	836.314.257.030.018,	836.314.257.030.023,
856.314.257.030.014,	856.314.257.030.016,	856.314.257.030.018,	856.314.257.030.025,
866.314.257.030.014,	866.314.257.030.016,	866.314.257.030.018,	866.314.257.030.021,

866.314.257.030.025,	876.314.257.030.012,	876.314.257.030.014,	876.314.257.030.016,
876.314.257.030.018,	876.314.257.030.023,	886.314.257.030.014,	886.314.257.030.016,
886.314.257.030.018.			

20. Бор в форме яйца:

856.204.277.514.018,	856.204.277.514.023,	866.204.277.524.018,	866.204.277.524.023,
866.104.277.045.023,	876.104.277.045.023,	886.104.277.045.023,	836.314.277.028.012,
836.314.277.028.014,	836.314.277.034.016,	836.314.277.041.018,	836.314.277.042.023,
856.314.277.025.009,	856.314.277.028.012,	856.314.277.028.014,	856.314.277.034.016,
856.314.277.041.018,	856.314.277.042.023,	856.314.277.042.025,	866.314.277.025.009,
866.314.277.028.012,	866.314.277.028.014,	866.314.277.034.016,	866.314.277.041.018,
866.314.277.042.023,	876.314.277.028.012,	876.314.277.028.014,	876.314.277.034.016,
876.314.277.041.018,	876.314.277.042.023,	886.314.277.028.012,	886.314.277.028.014,
886.314.277.034.016,	886.314.277.041.018,	886.314.277.042.023	

21. Бор в форме торпеды цилиндрической:

866.104.288.070.016,	866.104.288.070.025,	876.104.288.070.016,	876.104.288.070.025,
886.104.288.070.016,	886.104.288.070.025,	866.104.289.080.018,	876.104.289.080.018,
886.104.289.080.014,	886.104.289.080.018,	866.104.290.100.025,	876.104.290.100.025,
886.104.290.100.025,	836.314.290.100.010,	856.314.290.100.010,	856.314.290.100.012,
856.314.290.100.014,	856.314.290.100.016,	856.314.290.100.018,	866.314.290.100.010,
866.314.290.100.012,	866.314.290.100.014,	866.314.290.100.016,	866.314.290.100.018,
876.314.290.100.010,	876.314.290.100.012,	876.314.290.100.014,	876.314.290.100.016,
876.314.290.100.018,	886.314.290.100.010,	886.314.290.100.012,	886.314.290.100.014,
886.314.290.100.016,	886.314.290.100.018,	836.314.291.120.012,	836.314.291.120.016,
856.314.291.120.010,	856.314.291.120.012,	856.314.291.120.014,	856.314.291.120.016,
866.314.291.120.012,	866.314.291.120.014,	866.314.291.120.016,	876.314.291.120.012,
876.314.291.120.014,	876.314.291.120.016,	886.314.291.120.012,	886.314.291.120.014,
886.314.291.120.016.			

22. Бор в форме торпеды конусной:

856.314.295.030.007, 866.314.295.030.007, 866.314.295.030.012, 886.314.299.100.014.

23. Бор в форме линзы:

866.104.304.015.021, 876.104.304.015.021, 886.104.304.015.021

24. Бор луковницобразный:

836.314.464.040.018, 856.314.464.040.018, 866.314.464.040.018.

25. Бор межзубной:

856.314.465.050.018, 866.314.465.050.016, 866.314.465.050.018, 876.314.465.050.018.

26. Бор сферический с концевым буртиком, длинный:

856.314.494.100.018,	866.314.494.100.012,	866.314.494.100.014,	866.314.494.100.016,
866.314.494.100.018,	866.314.494.100.023,	876.314.494.100.012,	876.314.494.100.014,
876.314.494.100.016,	876.314.494.100.018,	876.314.494.100.023,	886.314.494.100.010,
886.314.494.100.012,	886.314.494.100.014,	886.314.494.100.016,	886.314.494.100.018,
886.314.494.100.023.			

27. Бор конусный, полусферический, выпуклая сторона:

856.314.507.060.018,	856.314.507.080.023,	866.314.507.060.018,	866.314.507.080.023,
876.314.507.060.018,	876.314.507.080.023,	886.314.507.080.023.	

28. Бор конусный, закругленный, боковое резание с направителем:

856.314.508.060.016,	856.314.508.080.021,	866.314.508.060.016,	866.314.508.080.021,
876.314.508.060.016,	876.314.508.080.021,	886.314.508.060.016,	886.314.508.080.021.

29. Бор иглообразный, короткий, длинная шейка:

856.314.539.080.010, 866.314.539.080.007, 866.314.539.080.010, 876.314.539.080.010.

30. Бор иглообразный, стандартный, длинная шейка:

836.314.540.080.010, 856.314.540.080.009, 856.314.540.080.010, 866.314.540.080.010,
876.314.540.080.010, 886.314.540.080.010.

31. Бор конусный с шариком, только боковое резание:

866.314.551.090.008, 866.314.551.090.010, 866.314.551.090.012, 866.314.551.090.014,
866.314.551.090.016, 876.314.551.090.008, 876.314.551.090.010, 876.314.551.090.012,
876.314.551.090.014, 876.314.551.090.016, 886.314.551.090.010, 886.314.551.090.012,
886.314.551.090.014, 886.314.551.090.016.

5.3 Основные размеры соответствуют параметрам, указанным на рисунках 1, 2, 3. Масса боров не превышает 3,5 г.

5.4 Класс в зависимости от потенциального риска применения в медицинских целях – 1 по ГОСТ 31508-2012 и Приказа Минздрава России от 06.06.2012г. № 4н

5.5 Параметр шероховатости поверхности рабочей части и шейки – Ra не более 1,25 мкм. Параметр шероховатости цилиндрической поверхности хвостовика – Ra не более 0,5 мкм.

5.6 Твердость хвостовика – не менее 250 HV5.

5.7 Поверхности боров без заусенцев, трещин, зазубрин и выкрошенных мест.

5.8 Биение рабочей части боров относительно цилиндрической части хвостовика не превышает 0,07 мм.

5.9 Шейка боров прочная. Остаточная деформация рабочей части бора при использовании не превышает 0,05 мм.

5.10 Средний ресурс работы (надежность) боров не менее 20 минут машинного времени.

За средний ресурс принимается частичная потеря абразивной поверхности бора, которая ведёт к росту температуры в рабочей зоне или поломка бора

5.11 Боры устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, согласно МУ-287-113 от 30.12.98 и инструкции по применению производителя:

– дезинфекции кипячением в лотке с дистиллированной водой с температурой 99 °С, в течение 30 минут;

– предстерилизационной очистки, состоящей из погружении боров в 0,5%-ый рабочий раствор средства «Биолот» (Россия) при температуре (40+5)°С и выдержки в нём в течение 15,0 минут. После чего ручным способом с помощью щетки или тканевой салфетки отмывают загрязнения в течение 0,5-2 мин. Затем промывают чистой проточной водой по ГОСТ Р 51232-98 в течение 5 минут (до полного отмывания моющего средства), ополаскивают дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72 0,5 минут;


– стерилизации в паровом стерилизаторе (автоклаве) под давлением 0,21 МПа и при температуре 135°С в течение (5+2) минут.

5.12 Боры коррозионностойки в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.13 Боры при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69.

5.14 Боры устойчивы к воздействию климатических факторов при транспортировании – по группе 5(ОЖ4) и при хранении – по группе 1 (Л) ГОСТ 15150-69.

5.15 Боры в транспортной упаковке устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании, и обладают вибропрочностью и ударопрочностью для группы изделий 2 по ГОСТ Р 50444-92.

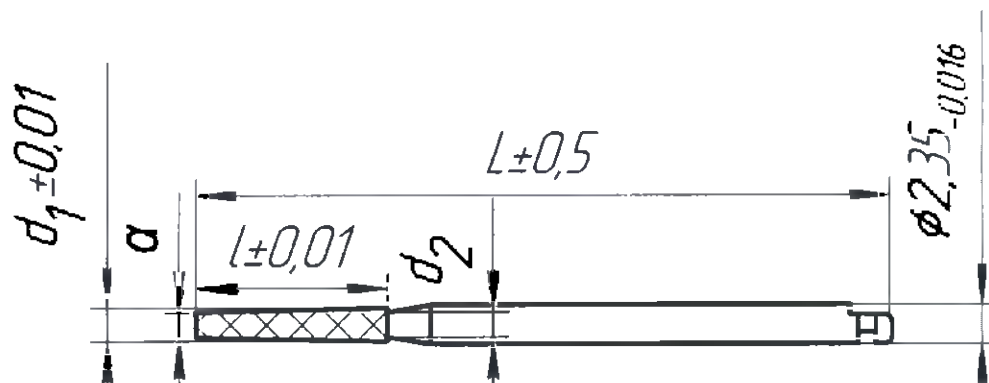


Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4-6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7-9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10-12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13-15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
836.204.001.018.018	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	83-алмаз экстремелкий (жёлтая)	018-1,8 мм	018-1,8 мм	1,0 мм	—
856.204.001.023.023	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	85-алмаз мелкий (красная)	023-2,3 мм	023-2,3 мм	1,2 мм	—
866.204.001.012.012	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	012-1,2 мм	012-1,2 мм	0,7 мм	—
866.204.001.014.014	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	014-1,4 мм	014-1,4 мм	0,8 мм	—
866.204.001.016.016	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	016-1,6 мм	016-1,6 мм	0,9 мм	—
866.204.001.018.018	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	018-1,8 мм	018-1,8 мм	1,0 мм	—
866.204.001.021.021	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	021-2,1 мм	021-2,1 мм	1,0 мм	—
866.204.001.023.023	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	023-2,3 мм	023-2,3 мм	1,2 мм	—
866.204.001.025.025	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	025-2,5 мм	025-2,5 мм	1,2 мм	—
866.204.001.029.029	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	029-2,9 мм	029-2,9 мм	1,5 мм	—
866.204.001.035.035	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	035-3,5 мм	035-3,5 мм	1,7 мм	—
876.204.001.012.012	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	87-алмаз грубый (зелёная)	012-1,2 мм	012-1,2 мм	0,7 мм	—
876.204.001.014.014	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	87-алмаз грубый (зелёная)	014-1,4 мм	014-1,4 мм	0,8 мм	—
876.204.001.016.016	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	87-алмаз грубый (зелёная)	016-1,6 мм	016-1,6 мм	0,9 мм	—
876.204.001.018.018	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	87-алмаз грубый (зелёная)	018-1,8 мм	018-1,8 мм	1,0 мм	—
876.204.001.021.021	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	87-алмаз грубый (зелёная)	021-2,1 мм	021-2,1 мм	1,0 мм	—
876.204.001.023.023	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	87-алмаз грубый (зелёная)	023-2,3 мм	023-2,3 мм	1,2 мм	—
876.204.001.025.025	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	87-алмаз грубый (зелёная)	025-2,5 мм	025-2,5 мм	1,2 мм	—
876.204.001.029.029	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	87-алмаз грубый (зелёная)	029-2,9 мм	029-2,9 мм	1,5 мм	—
876.204.001.035.035	204 (стандартный)-22 мм	001-Сферическая (круглая)	87-алмаз грубый (зелёная)	035-3,5 мм	035-3,5 мм	1,7 мм	—
866.204.108.030.012	204 (стандартный)-22 мм	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	030-3,0 мм	012-1,2 мм	1,2 мм	—
866.204.111.080.014	204 (стандартный)-22 мм	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1<9,5 мм)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	080-8,0 мм	014-1,4 мм	1,3 мм	—
866.204.165.080.014	204 (стандартный)-22 мм	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<1<8,5 мм)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	080-8,0 мм	014-1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
866.204.166.100.010	204 (стандартный)-22 мм	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<1<10,5 мм)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	100-10,0 мм	010-1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
866.204.166.100.014	204 (стандартный)-22 мм	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<1<10,5 мм)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	100-10,0 мм	014-1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
866.204.225.524.018	204 (стандартный)-22 мм	225-Обратноконусная (d<1<3d)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	040-4,0 мм	018-1,8 мм	1,4 мм	4,5°±1,5°
856.204.277.514.018	204 (стандартный)-22 мм	277-Яйцо	85-алмаз мелкий (красная)	080-8,0 мм	018-1,8 мм	1,6 мм	—
856.204.277.514.023	204 (стандартный)-22 мм	277-Яйцо	85-алмаз мелкий (красная)	080-8,0 мм	023-2,3 мм	1,8 мм	—
866.204.277.524.018	204 (стандартный)-22 мм	277-Яйцо	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	080-8,0 мм	018-1,8 мм	1,6 мм	—
866.204.277.524.023	204 (стандартный)-22 мм	277-Яйцо	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	080-8,0 мм	023-2,3 мм	1,8 мм	—
866.205.001.014.014	205 (длинный)-26 мм	001-Сферическая (круглая)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	014-1,4 мм	014-1,4 мм	0,8 мм	—

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.205.001.016.016	205 (длинный)–26 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	016–1,6 мм	016–1,6 мм	0,9 мм	–
866.205.001.018.018	205 (длинный)–26 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
866.205.001.021.021	205 (длинный)–26 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	021–2,1 мм	021–2,1 мм	1,0 мм	–
866.205.001.023.023	205 (длинный)–26 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–
866.205.001.025.025	205 (длинный)–26 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	025–2,5 мм	025–2,5 мм	1,2 мм	–
876.205.001.014.014	205 (длинный)–26 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
876.205.001.016.016	205 (длинный)–26 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	016–1,6 мм	016–1,6 мм	0,9 мм	–
876.205.001.018.018	205 (длинный)–26 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
876.205.001.021.021	205 (длинный)–26 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	021–2,1 мм	021–2,1 мм	1,0 мм	–
876.205.001.023.023	205 (длинный)–26 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–
876.205.001.025.025	205 (длинный)–26 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	025–2,5 мм	025–2,5 мм	1,2 мм	–
836.206.001.014.014	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
856.206.001.014.014	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
866.206.001.014.014	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
876.206.001.014.014	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
886.206.001.014.014	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
836.206.001.018.018	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
856.206.001.018.018	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
866.206.001.018.018	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
876.206.001.018.018	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
886.206.001.018.018	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
836.206.001.023.023	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	Алмаз экстремелкий (жёлтая)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–
856.206.001.023.023	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–
866.206.001.023.023	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–
876.206.001.023.023	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–
886.206.001.023.023	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–
836.206.001.027.027	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	027–2,7 мм	027–2,7 мм	1,3 мм	–
856.206.001.027.027	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	027–2,7 мм	027–2,7 мм	1,3 мм	–
866.206.001.027.027	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	027–2,7 мм	027–2,7 мм	1,3 мм	–
876.206.001.027.027	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	027–2,7 мм	027–2,7 мм	1,3 мм	–
886.206.001.027.027	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	027–2,7 мм	027–2,7 мм	1,3 мм	–
836.206.001.033.033	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	033–3,3 мм	033–3,3 мм	1,6 мм	–
856.206.001.033.033	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	033–3,3 мм	033–3,3 мм	1,6 мм	–
866.206.001.033.033	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	033–3,3 мм	033–3,3 мм	1,6 мм	–
876.206.001.033.033	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	033–3,3 мм	033–3,3 мм	1,6 мм	–
886.206.001.033.033	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	033–3,3 мм	033–3,3 мм	1,6 мм	–
836.206.001.035.035	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	035–3,5 мм	035–3,5 мм	1,7 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
856.206.001.035.035	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	035–3,5 мм	035–3,5 мм	1,7 мм	–
866.206.001.035.035	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	035–3,5 мм	035–3,5 мм	1,7 мм	–
876.206.001.035.035	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	035–3,5 мм	035–3,5 мм	1,7 мм	–
886.206.001.035.035	206 (экстрадлинный)–34 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	035–3,5 мм	035–3,5 мм	1,7 мм	–

Примечание: показатель «Угол рабочей части, α» применим только для боров, имеющих коническую или обратноконусную рабочую часть

Рисунок Б.1 –Боры диаметром 2,35–0,016 мм цилиндрические с канавкой и плоской лыской
(хвостовик типа 1 – для закрепления в угловых наконечниках)

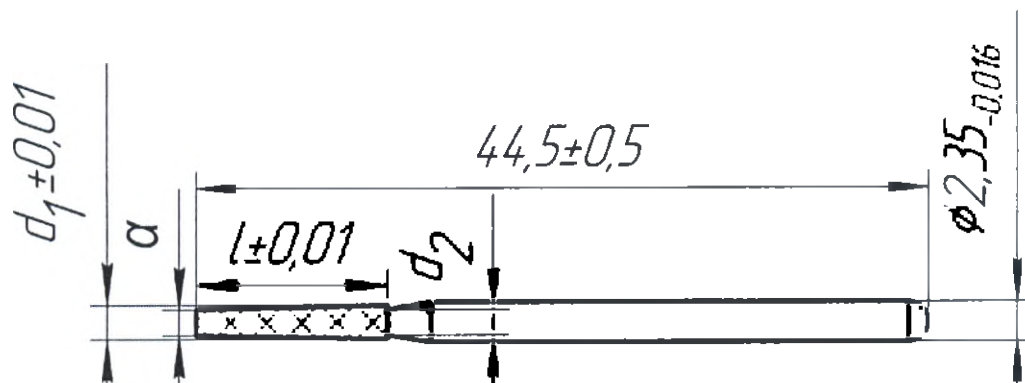

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.104.001.009.009	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	009–0,9 мм	009–0,9 мм	0,6 мм	–
866.104.001.010.010	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	010–1,0 мм	010–1,0 мм	0,7 мм	–
866.104.001.012.012	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	012–1,2 мм	012–1,2 мм	0,7 мм	–
866.104.001.014.014	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
866.104.001.016.016	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	016–1,6 мм	016–1,6 мм	0,9 мм	–
866.104.001.018.018	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
866.104.001.021.021	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	021–2,1 мм	021–2,1 мм	1,0 мм	–
866.104.001.023.023	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–
866.104.001.025.025	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	025–2,5 мм	025–2,5 мм	1,2 мм	–
866.104.001.027.027	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	027–2,7 мм	027–2,7 мм	1,3 мм	–
866.104.001.029.029	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	029–2,9 мм	029–2,9 мм	1,5 мм	–
866.104.001.033.033	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	033–3,3 мм	033–3,3 мм	1,6 мм	–
866.104.001.035.035	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	035–3,5 мм	035–3,5 мм	1,7 мм	–
866.104.001.042.042	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	042–4,2 мм	042–4,2 мм	2,0 мм	–
866.104.001.050.050	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	050–5,0 мм	2,3 мм	–
876.104.001.012.012	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	012–1,2 мм	012–1,2 мм	0,7 мм	–
876.104.001.014.014	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
876.104.001.016.016	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	016–1,6 мм	016–1,6 мм	0,9 мм	–
876.104.001.018.018	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
876.104.001.021.021	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	021–2,1 мм	021–2,1 мм	1,0 мм	–
876.104.001.023.023	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
876.104.001.025.025	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	025–2,5 мм	025–2,5 мм	1,2 мм	–
876.104.001.027.027	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	027–2,7 мм	027–2,7 мм	1,3 мм	–
876.104.001.029.029	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	029–2,9 мм	029–2,9 мм	1,5 мм	–
876.104.001.033.033	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	033–3,3 мм	033–3,3 мм	1,6 мм	–
876.104.001.035.035	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	035–3,5 мм	035–3,5 мм	1,7 мм	–
876.104.001.042.042	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	042–4,2 мм	042–4,2 мм	2,0 мм	–
876.104.001.050.050	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	050–5,0 мм	2,3 мм	–
886.104.001.012.012	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	012–1,2 мм	012–1,2 мм	0,7 мм	–
886.104.001.014.014	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
886.104.001.016.016	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	016–1,6 мм	016–1,6 мм	0,9 мм	–
886.104.001.018.018	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
886.104.001.021.021	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	021–2,1 мм	021–2,1 мм	1,0 мм	–
886.104.001.023.023	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–
886.104.001.025.025	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	025–2,5 мм	025–2,5 мм	1,2 мм	–
886.104.001.027.027	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	027–2,7 мм	027–2,7 мм	1,3 мм	–
886.104.001.029.029	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	029–2,9 мм	029–2,9 мм	1,5 мм	–
886.104.001.033.033	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	033–3,3 мм	033–3,3 мм	1,6 мм	–
886.104.001.035.035	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	035–3,5 мм	035–3,5 мм	1,7 мм	–
886.104.001.042.042	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	042–4,2 мм	042–4,2 мм	2,0 мм	–
886.104.001.050.050	104 (стандартный)–44,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	050–5,0 мм	050–5,0 мм	2,3 мм	–
866.104.002.025.016	104 (стандартный)–44,5 мм	002–Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	025–2,5 мм	016–1,6 мм	0,9 мм	–
866.104.002.025.018	104 (стандартный)–44,5 мм	002–Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	025–2,5 мм	018–1,8 мм	0,9 мм	–
876.104.002.025.016	104 (стандартный)–44,5 мм	002–Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	87–алмаз грубый (зелёная)	025–2,5 мм	016–1,6 мм	0,9 мм	–
876.104.002.025.018	104 (стандартный)–44,5 мм	002–Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	87–алмаз грубый (зелёная)	025–2,5 мм	018–1,8 мм	0,9 мм	–
866.104.010.020.009	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	020–2,0 мм	009–0,9 мм	0,8 мм	4,5°±1,5°
866.104.010.020.010	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	020–2,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
866.104.010.035.012	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	035–3,5 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
866.104.010.035.014	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	035–3,5 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	4,5°±1,5°
866.104.010.035.016	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	035–3,5 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
866.104.010.040.018	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	018–1,8 мм	1,4 мм	5,0°±1,5°
866.104.010.040.021	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	021–2,1 мм	1,8 мм	5,0°±1,5°
866.104.010.040.023	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	023–2,3 мм	1,9 мм	5,0°±1,5°
866.104.010.040.025	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	025–2,5 мм	2,0 мм	5,0°±1,5°
866.104.010.040.040	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	040–4,0 мм	2,1 мм	5,0°±1,5°
866.104.010.040.050	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	050–5,0 мм	2,3 мм	5,0°±1,5°
876.104.010.035.012	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	87–алмаз грубый (зелёная)	035–3,5 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
876.104.010.035.014	104 (стандартный)–44,5 мм	010–Обратноконусная	87–алмаз грубый (зелёная)	035–3,5 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	4,5°±1,5°

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4-6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7-9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10-12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13-15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
876.104.010.035.016	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	87—алмаз грубый (зелёная)	035—3,5 мм	016—1,6 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
876.104.010.040.018	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	87—алмаз грубый (зелёная)	040—4,0 мм	018—1,8 мм	1,4 мм	5,0°±1,5°
876.104.010.040.021	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	87—алмаз грубый (зелёная)	040—4,0 мм	021—2,1 мм	1,8 мм	5,0°±1,5°
876.104.010.040.023	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	87—алмаз грубый (зелёная)	040—4,0 мм	023—2,3 мм	1,9 мм	5,0°±1,5°
876.104.010.040.025	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	87—алмаз грубый (зелёная)	040—4,0 мм	025—2,5 мм	2,0 мм	5,0°±1,5°
876.104.010.040.040	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	87—алмаз грубый (зелёная)	040—4,0 мм	040—4,0 мм	2,1 мм	5,0°±1,5°
876.104.010.050.050	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	87—алмаз грубый (зелёная)	050—5,0 мм	050—5,0 мм	2,3 мм	5,0°±1,5°
886.104.010.035.012	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	88—алмаз очень грубый (чёрная)	035—3,5 мм	012—1,2 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
886.104.010.035.014	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	88—алмаз очень грубый (чёрная)	035—3,5 мм	014—1,4 мм	1,1 мм	4,5°±1,5°
886.104.010.035.016	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	88—алмаз очень грубый (чёрная)	035—3,5 мм	016—1,6 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
886.104.010.040.018	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	88—алмаз очень грубый (чёрная)	040—4,0 мм	018—1,8 мм	1,4 мм	5,0°±1,5°
886.104.010.040.021	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	88—алмаз очень грубый (чёрная)	040—4,0 мм	021—2,1 мм	1,8 мм	5,0°±1,5°
886.104.010.040.023	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	88—алмаз очень грубый (чёрная)	040—4,0 мм	023—2,3 мм	1,9 мм	5,0°±1,5°
886.104.010.040.025	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	88—алмаз очень грубый (чёрная)	040—4,0 мм	025—2,5 мм	2,0 мм	5,0°±1,5°
886.104.010.040.040	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	88—алмаз очень грубый (чёрная)	040—4,0 мм	040—4,0 мм	2,1 мм	5,0°±1,5°
886.104.010.050.050	104 (стандартный)—44,5 мм	010—Обратноконусная	88—алмаз очень грубый (чёрная)	050—5,0 мм	050—5,0 мм	2,3 мм	5,0°±1,5°
866.104.019.035.012	104 (стандартный)—44,5 мм	019—Обратноконусная с буртиком	86—алмаз средний (синяя/без цвета)	035—3,5 мм	012—1,2 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
866.104.019.040.018	104 (стандартный)—44,5 мм	019—Обратноконусная с буртиком	86—алмаз средний (синяя/без цвета)	040—4,0 мм	018—1,8 мм	1,4 мм	5,0°±1,5°
866.104.019.040.023	104 (стандартный)—44,5 мм	019—Обратноконусная с буртиком	86—алмаз средний (синяя/без цвета)	040—4,0 мм	023—2,3 мм	1,9 мм	5,0°±1,5°
876.104.019.035.012	104 (стандартный)—44,5 мм	019—Обратноконусная с буртиком	87—алмаз грубый (зелёная)	035—3,5 мм	012—1,2 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
876.104.019.040.018	104 (стандартный)—44,5 мм	019—Обратноконусная с буртиком	87—алмаз грубый (зелёная)	040—4,0 мм	018—1,8 мм	1,4 мм	5,0°±1,5°
876.104.019.040.023	104 (стандартный)—44,5 мм	019—Обратноконусная с буртиком	87—алмаз грубый (зелёная)	040—4,0 мм	023—2,3 мм	1,9 мм	5,0°±1,5°
886.104.019.035.012	104 (стандартный)—44,5 мм	019—Обратноконусная с буртиком	88—алмаз очень грубый (чёрная)	035—3,5 мм	012—1,2 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
886.104.019.040.018	104 (стандартный)—44,5 мм	019—Обратноконусная с буртиком	88—алмаз очень грубый (чёрная)	040—4,0 мм	018—1,8 мм	1,4 мм	5,0°±1,5°
886.104.019.040.023	104 (стандартный)—44,5 мм	019—Обратноконусная с буртиком	88—алмаз очень грубый (чёрная)	040—4,0 мм	023—2,3 мм	1,9 мм	5,0°±1,5°
866.104.108.030.012	104 (стандартный)—44,5 мм	108—Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	86—алмаз средний (синяя/без цвета)	030—3,0 мм	012—1,2 мм	1,2 мм	—
866.104.108.030.016	104 (стандартный)—44,5 мм	108—Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	86—алмаз средний (синяя/без цвета)	030—3,0 мм	016—1,6 мм	1,5 мм	—
866.104.108.030.018	104 (стандартный)—44,5 мм	108—Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	86—алмаз средний (синяя/без цвета)	030—3,0 мм	018—1,8 мм	1,6 мм	—
866.104.108.030.035	104 (стандартный)—44,5 мм	108—Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	86—алмаз средний (синяя/без цвета)	030—3,0 мм	035—3,5 мм	2,0 мм	—
876.104.108.030.012	104 (стандартный)—44,5 мм	108—Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	87—алмаз грубый (зелёная)	030—3,0 мм	012—1,2 мм	1,2 мм	—
876.104.108.030.016	104 (стандартный)—44,5 мм	108—Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	87—алмаз грубый (зелёная)	030—3,0 мм	016—1,6 мм	1,5 мм	—
876.104.108.030.018	104 (стандартный)—44,5 мм	108—Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	87—алмаз грубый (зелёная)	030—3,0 мм	018—1,8 мм	1,6 мм	—
876.104.108.030.035	104 (стандартный)—44,5 мм	108—Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	87—алмаз грубый (зелёная)	030—3,0 мм	035—3,5 мм	2,0 мм	—

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
886.104.108.030.012	104 (стандартный)–44,5 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (K3,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.104.108.030.016	104 (стандартный)–44,5 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.104.108.030.018	104 (стандартный)–44,5 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.104.108.030.035	104 (стандартный)–44,5 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	035–3,5 мм	2,0 мм	–
866.104.110.060.012	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.104.110.060.014	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.104.110.060.016	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.104.110.060.027	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	027–2,7 мм	2,3 мм	–
866.104.110.060.050	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	050–5,0 мм	2,3 мм	–
866.104.110.060.055	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	055–5,5 мм	2,35 мм	–
866.104.110.060.060	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	060–6,0 мм	2,35 мм	–
876.104.110.060.012	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.104.110.060.014	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.104.110.060.016	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.104.110.060.027	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	027–2,7 мм	2,3 мм	–
876.104.110.060.050	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	050–5,0 мм	2,3 мм	–
876.104.110.060.055	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	055–5,5 мм	2,35 мм	–
876.104.110.060.060	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	060–6,0 мм	2,35 мм	–
886.104.110.060.012	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.104.110.060.014	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.104.110.060.016	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.104.110.060.027	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	027–2,7 мм	2,3 мм	–
886.104.110.060.050	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	050–5,0 мм	2,3 мм	–
886.104.110.060.055	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	055–5,5 мм	2,35 мм	–
886.104.110.060.060	104 (стандартный)–44,5 мм	110–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	060–6,0 мм	2,35 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая копировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.104.111.080.012	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.104.111.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.104.111.080.016	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.104.111.080.025	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	025–2,5 мм	1,8 мм	–
866.104.111.080.027	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	027–2,7 мм	2,3 мм	–
866.104.111.080.040	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	040–4,0 мм	2,3 мм	–
866.104.111.080.050	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	050–5,0 мм	2,35 мм	–
866.104.111.080.055	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	055–5,5 мм	2,35 мм	–
866.104.111.080.060	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	060–6,0 мм	2,3 мм	–
876.104.111.080.012	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.104.111.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.104.111.080.016	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.104.111.080.025	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	025–2,5 мм	1,8 мм	–
876.104.111.080.027	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	027–2,7 мм	2,3 мм	–
876.104.111.080.040	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	040–4,0 мм	2,3 мм	–
876.104.111.080.050	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	050–5,0 мм	2,35 мм	–
876.104.111.080.055	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	055–5,5 мм	2,35 мм	–
876.104.111.080.060	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	060–6,0 мм	2,3 мм	–
886.104.111.080.012	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.104.111.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.104.111.080.016	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.104.111.080.025	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	025–2,5 мм	1,8 мм	–
886.104.111.080.027	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	027–2,7 мм	2,3 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного терня (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
886.104.111.080.040	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	040–4,0 мм	2,3 мм	–
886.104.111.080.050	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	050–5,0 мм	2,35 мм	–
886.104.111.080.055	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	055–5,5 мм	2,35 мм	–
886.104.111.080.060	104 (стандартный)–44,5 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	060–6,0 мм	2,3 мм	–
866.104.130.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.104.130.080.016	104 (стандартный)–44,5 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.104.130.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.104.130.080.016	104 (стандартный)–44,5 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.104.130.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.104.130.080.016	104 (стандартный)–44,5 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.104.142.100.014	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.104.142.100.016	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.104.142.100.018	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.104.142.100.025	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	025–2,5 мм	1,63	–
876.104.142.100.014	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.104.142.100.016	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.104.142.100.018	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.104.142.100.025	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	025–2,5 мм	1,63 мм	–
886.104.142.100.014	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.104.142.100.016	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.104.142.100.018	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.104.142.100.025	104 (стандартный)–44,5 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	025–2,5 мм	1,63 мм	–
866.104.165.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	165–Конусная, заостренная тонкая (6,5<l<8,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
866.104.165.080.018	104 (стандартный)–44,5 мм	165–Конусная, заостренная тонкая (6,5<l<8,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
876.104.165.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	165–Конусная, заостренная тонкая (6,5<l<8,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
876.104.165.080.018	104 (стандартный)–44,5 мм	165–Конусная, заостренная тонкая (6,5<l<8,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
886.104.165.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	165–Конусная, заостренная тонкая (6,5<l<8,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
886.104.165.080.018	104 (стандартный)–44,5 мм	165–Конусная, заостренная тонкая (6,5<l<8,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
866.104.166.100.018	104 (стандартный)–44,5 мм	166–Конусная, заостренная тонкая (8,5<l<10,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
866.104.166.100.025	104 (стандартный)–44,5 мм	166–Конусная, заостренная тонкая (8,5<l<10,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	025–2,5 мм	1,8 мм	4,5°±1,5°
876.104.166.100.018	104 (стандартный)–44,5 мм	166–Конусная, заостренная тонкая (8,5<l<10,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.104.198.080.023	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	023–2,3 мм	1,8 мм	4,5°±1,5°
866.104.198.080.025	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	025–2,5 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
866.104.198.080.027	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	027–2,7 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
866.104.198.080.033	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	033–3,3 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
866.104.198.080.035	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	035–3,5 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
866.104.198.080.040	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	040–4,0 мм	2,35 мм	4,5°±1,5°
876.104.198.080.016	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
876.104.198.080.023	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	023–2,3 мм	1,8 мм	4,5°±1,5°
876.104.198.080.025	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	025–2,5 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
876.104.198.080.027	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	027–2,7 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
876.104.198.080.033	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	033–3,3 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
876.104.198.080.035	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	035–3,5 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
876.104.198.080.040	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	040–4,0 мм	2,35 мм	4,5°±1,5°
886.104.198.080.016	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
886.104.198.080.023	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	023–2,3 мм	1,8 мм	4,5°±1,5°
886.104.198.080.025	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	025–2,5 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
886.104.198.080.027	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	027–2,7 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
886.104.198.080.033	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	033–3,3 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
886.104.198.080.035	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	035–3,5 мм	2,1 мм	4,5°±1,5°
886.104.198.080.040	104 (стандартный)–44,5 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	040–4,0 мм	2,35 мм	4,5°±1,5°


Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.104.225.040.014	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	5,5°±1,5°
866.104.225.040.016	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	5,5°±1,5°
866.104.225.040.018	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	018–1,8 мм	1,4 мм	5,5°±1,5°
866.104.225.040.021	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	021–2,1 мм	1,8 мм	5,5°±1,5°
866.104.225.040.023	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	023–2,3 мм	1,9 мм	5,5°±1,5°
876.104.225.040.014	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	040–4,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	5,5°±1,5°
876.104.225.040.016	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	040–4,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	5,5°±1,5°
876.104.225.040.018	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	040–4,0 мм	018–1,8 мм	1,4 мм	5,5°±1,5°
876.104.225.040.021	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	040–4,0 мм	021–2,1 мм	1,8 мм	5,5°±1,5°
876.104.225.040.023	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	040–4,0 мм	023–2,3 мм	1,9 мм	5,5°±1,5°
886.104.225.040.014	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	040–4,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	5,5°±1,5°
886.104.225.040.016	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	040–4,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	5,5°±1,5°
886.104.225.040.018	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	040–4,0 мм	018–1,8 мм	1,4 мм	5,5°±1,5°
886.104.225.040.021	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	040–4,0 мм	021–2,1 мм	1,8 мм	5,5°±1,5°
886.104.225.040.023	104 (стандартный)–44,5 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	040–4,0 мм	023–2,3 мм	1,9 мм	5,5°±1,5°
866.104.232.020.016	104 (стандартный)–44,5 мм	232–Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	020–2,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
876.104.232.020.016	104 (стандартный)–44,5 мм	232–Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	87–алмаз грубый (зелёная)	020–2,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
886.104.232.020.016	104 (стандартный)–44,5 мм	232–Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	88–алмаз очень грубый (чёрная)	020–2,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
876.104.243.080.012	104 (стандартный)–44,5 мм	243–Пламя, стандартная	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	–
886.104.243.080.012	104 (стандартный)–44,5 мм	243–Пламя, стандартная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	–
866.104.249.080.010	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.104.249.080.012	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.104.249.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.104.249.080.016	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.104.249.080.018	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.104.249.080.021	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	021–2,1 мм	1,7 мм	–
876.104.249.080.010	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.104.249.080.012	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.104.249.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.104.249.080.016	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.104.249.080.018	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.104.249.080.021	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	021–2,1 мм	1,7 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
886.104.249.080.010	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.104.249.080.012	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.104.249.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.104.249.080.016	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.104.249.080.018	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.104.249.080.021	104 (стандартный)–44,5 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	021–2,1 мм	1,7 мм	–
866.104.251.120.014	104 (стандартный)–44,5 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.104.251.120.018	104 (стандартный)–44,5 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	120–12,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.104.251.120.060	104 (стандартный)–44,5 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	120–12,0 мм	060–6,0 мм	2,35 мм	–
876.104.251.120.014	104 (стандартный)–44,5 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.104.251.120.018	104 (стандартный)–44,5 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.104.251.120.060	104 (стандартный)–44,5 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	060–6,0 мм	2,35 мм	–
886.104.251.120.014	104 (стандартный)–44,5 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.104.251.120.018	104 (стандартный)–44,5 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.104.251.120.060	104 (стандартный)–44,5 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	060–6,0 мм	2,35 мм	–
866.104.254.050.014	104 (стандартный)–44,5 мм	254–Почка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.104.254.050.014	104 (стандартный)–44,5 мм	254–Почка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.104.254.050.014	104 (стандартный)–44,5 мм	254–Почка	88–алмаз очень грубый (чёрная)	050–5,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.104.257.030.012	104 (стандартный)–44,5 мм	257–Почка, тонкая	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
866.104.257.030.016	104 (стандартный)–44,5 мм	257–Почка, тонкая	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
866.104.257.030.023	104 (стандартный)–44,5 мм	257–Почка, тонкая	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	023–2,3 мм	2,1 мм	–
876.104.257.030.012	104 (стандартный)–44,5 мм	257–Почка, тонкая	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
876.104.257.030.016	104 (стандартный)–44,5 мм	257–Почка, тонкая	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
876.104.257.030.023	104 (стандартный)–44,5 мм	257–Почка, тонкая	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	023–2,3 мм	2,1 мм	–
886.104.257.030.012	104 (стандартный)–44,5 мм	257–Почка, тонкая	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
886.104.257.030.016	104 (стандартный)–44,5 мм	257–Почка, тонкая	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
866.104.277.045.023	104 (стандартный)–44,5 мм	277–Яйцо	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	045–4,5 мм	023–2,3 мм	2,1 мм	–
876.104.277.045.023	104 (стандартный)–44,5 мм	277–Яйцо	87–алмаз грубый (зелёная)	045–4,5 мм	023–2,3 мм	2,1 мм	–
886.104.277.045.023	104 (стандартный)–44,5 мм	277–Яйцо	88–алмаз очень грубый (чёрная)	045–4,5 мм	023–2,3 мм	2,1 мм	–
866.104.288.070.016	104 (стандартный)–44,5 мм	288–Торпеда цилиндрическая (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	070–7,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
866.104.288.070.025	104 (стандартный)–44,5 мм	288–Торпеда цилиндрическая (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	070–7,0 мм	025–2,5 мм	2,1 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4-6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7-9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10-12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13-15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
876.104.288.070.016	104 (стандартный)–44,5 мм	288–Торпеда цилиндрическая (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	070–7,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
876.104.288.070.025	104 (стандартный)–44,5 мм	288–Торпеда цилиндрическая (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	070–7,0 мм	025–2,5 мм	2,1 мм	–
886.104.288.070.016	104 (стандартный)–44,5 мм	288–Торпеда цилиндрическая (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	070–7,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
886.104.288.070.025	104 (стандартный)–44,5 мм	288–Торпеда цилиндрическая (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	070–7,0 мм	025–2,5 мм	2,1 мм	–
866.104.289.080.018	104 (стандартный)–44,5 мм	289–Торпеда цилиндрическая (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.104.289.080.018	104 (стандартный)–44,5 мм	289–Торпеда цилиндрическая (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.104.289.080.014	104 (стандартный)–44,5 мм	289–Торпеда цилиндрическая (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.104.289.080.018	104 (стандартный)–44,5 мм	289–Торпеда цилиндрическая (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.104.290.100.025	104 (стандартный)–44,5 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	025–2,5 мм	2,35 мм	–
876.104.290.100.025	104 (стандартный)–44,5 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	025–2,5 мм	2,35 мм	–
886.104.290.100.025	104 (стандартный)–44,5 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	025–2,5 мм	2,35 мм	–
866.104.304.015.021	104 (стандартный)–44,5 мм	304–Линза (20% d<l)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	015–1,5 мм	021–2,1 мм	2,1 мм	–
876.104.304.015.021	104 (стандартный)–44,5 мм	304–Линза (20% d<l)	87–алмаз грубый (зелёная)	015–1,5 мм	021–2,1 мм	2,1 мм	–
886.104.304.015.021	104 (стандартный)–44,5 мм	304–Линза (20% d<l)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	015–1,5 мм	021–2,1 мм	2,1 мм	–
866.104.250.100.012	104 (стандартный)–44,5 мм	250–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	–

Примечание: показатель «Угол рабочей части, α» применим только для боров, имеющих коническую или обратноконусную рабочую часть

Рисунок Б.2 – Боры диаметром 2,35–0,016 мм цилиндрические с коническим и сферическим торцом (хвостовик типа 2 – для закрепления в прямых наконечниках)

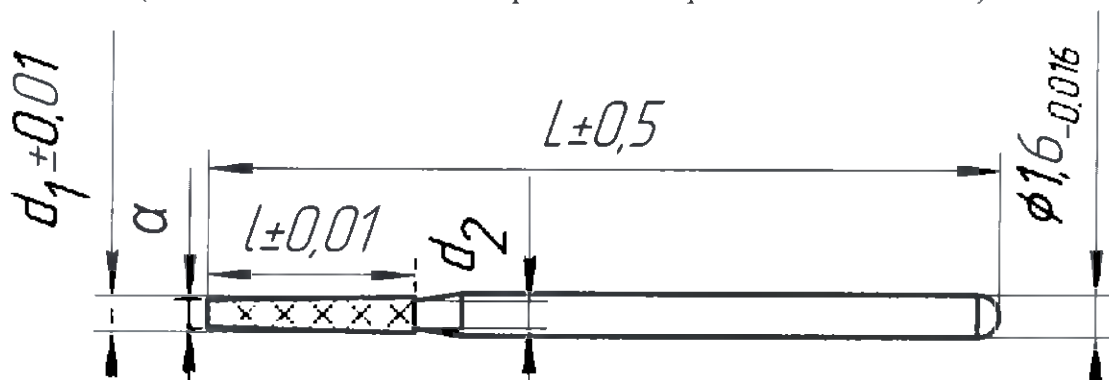

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4-6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7-9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10-12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13-15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.314.232.020.010	314 (стандартный)–19 мм	232–Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	020–2,0 мм	010–1,0 мм	0,75 мм	4,5°±1,5°
876.314.232.020.010	314 (стандартный)–19 мм	232–Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	87–алмаз грубый (зелёная)	020–2,0 мм	010–1,0 мм	0,75 мм	4,5°±1,5°
856.313.001.014.014	313 (короткий)–16,5 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
866.313.001.014.014	313 (короткий)–16,5 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
876.313.001.014.014	313 (короткий)–16,5 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
886.313.001.014.014	313 (короткий)–16,5 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
856.313.010.020.010	313 (короткий)–16,5 мм	010–Обратноконусная	85–алмаз мелкий (красная)	020–2,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
866.313.010.020.010	313 (короткий)–16,5 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	020–2,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
876.313.010.020.010	313 (короткий)–16,5 мм	010–Обратноконусная	87–алмаз грубый (зелёная)	020–2,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
866.314.010.035.012	314 (стандартный)–19 мм	010–Обратноконусная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	035–3,5 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
876.313.012.035.012	313 (короткий)–16,5 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	87–алмаз грубый (зелёная)	035–3,5 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	17°±1°
886.313.012.035.012	313 (короткий)–16,5 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	035–3,5 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	17°±1°
866.313.019.035.014	313 (короткий)–16,5 мм	019–Обратноконусная с буртиком	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	035–3,5 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	4,5°±1,5°
886.313.019.035.014	313 (короткий)–16,5 мм	019–Обратноконусная с буртиком	88–алмаз очень грубый (чёрная)	035–3,5 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	4,5°±1,5°
856.313.108.030.010	313 (короткий)–16,5 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.313.108.030.010	313 (короткий)–16,5 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.313.108.030.010	313 (короткий)–16,5 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.313.108.030.012	313 (короткий)–16,5 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.313.108.030.010	313 (короткий)–16,5 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l<3,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.313.243.080.010	313 (короткий)–16,5 мм	243–Пламя, стандартная	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.313.243.080.010	313 (короткий)–16,5 мм	243–Пламя, стандартная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.313.243.080.010	313 (короткий)–16,5 мм	243–Пламя, стандартная	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	–
886.313.243.080.010	313 (короткий)–16,5 мм	243–Пламя, стандартная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
836.314.001.010.010	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	010–1,0 мм	010–1,0 мм	0,7 мм	–
836.314.001.012.012	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	012–1,2 мм	012–1,2 мм	0,7 мм	–
836.314.001.014.014	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
836.314.001.016.016	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	016–1,6 мм	016–1,6 мм	0,9 мм	–
836.314.001.018.018	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
836.314.001.023.023	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–
856.314.001.007.007	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	007–0,7 мм	007–0,7 мм	0,5 мм	–
856.314.001.008.008	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	008–0,8 мм	008–0,8 мм	0,53 мм	–
856.314.001.010.010	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	010–1,0 мм	010–1,0 мм	0,7 мм	–
856.314.001.012.012	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	012–1,2 мм	012–1,2 мм	0,7 мм	–
856.314.001.014.014	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	014–1,4 мм	014–1,4 мм	0,8 мм	–
856.314.001.016.016	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	016–1,6 мм	016–1,6 мм	0,9 мм	–
856.314.001.018.018	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	–
856.314.001.021.021	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	021–2,1 мм	021–2,1 мм	1,0 мм	–
856.314.001.023.023	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	023–2,3 мм	023–2,3 мм	1,2 мм	–
856.314.001.025.025	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	025–2,5 мм	025–2,5 мм	1,2 мм	–
856.314.001.035.035	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	035–3,5 мм	035–3,5 мм	1,6 мм	–
866.314.001.007.007	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	007–0,7 мм	007–0,7 мм	0,5 мм	–
866.314.001.008.008	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	008–0,8 мм	008–0,8 мм	0,53 мм	–
866.314.001.010.010	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	010–1,0 мм	010–1,0 мм	0,7 мм	–
866.314.001.012.012	314 (стандартный)–19 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	012–1,2 мм	012–1,2 мм	0,7 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
856.314.012.011.014	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	85–алмаз мелкий (красная)	011–1,1 мм	014–1,4 мм	0,83 мм	17°±1°
856.314.012.015.016	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	85–алмаз мелкий (красная)	015–1,5 мм	016–1,6 мм	0,89 мм	17°±1°
856.314.012.018.018	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	85–алмаз мелкий (красная)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	17°±1°
866.314.012.007.010	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	007–0,7 мм	010–1,0 мм	0,6 мм	17°±1°
866.314.012.010.012	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	010–1,0 мм	012–1,2 мм	0,7 мм	17°±1°
866.314.012.011.014	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	011–1,1 мм	014–1,4 мм	0,83 мм	17°±1°
866.314.012.015.016	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	015–1,5 мм	016–1,6 мм	0,89 мм	17°±1°
866.314.012.018.018	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	17°±1°
876.314.012.007.010	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	87–алмаз грубый (зелёная)	007–0,7 мм	010–1,0 мм	0,6 мм	17°±1°
876.314.012.010.012	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	87–алмаз грубый (зелёная)	010–1,0 мм	012–1,2 мм	0,7 мм	17°±1°
876.314.012.011.014	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	87–алмаз грубый (зелёная)	011–1,1 мм	014–1,4 мм	0,83 мм	17°±1°
876.314.012.015.016	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	87–алмаз грубый (зелёная)	015–1,5 мм	016–1,6 мм	0,89 мм	17°±1°
876.314.012.018.018	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	87–алмаз грубый (зелёная)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	17°±1°
876.314.012.019.021	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	87–алмаз грубый (зелёная)	019–1,9 мм	021–2,1 мм	1,0 мм	17°±1°
886.314.012.010.012	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	010–1,0 мм	012–1,2 мм	0,7 мм	17°±1°
886.314.012.011.014	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	011–1,1 мм	014–1,4 мм	0,83 мм	17°±1°
886.314.012.015.016	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	015–1,5 мм	016–1,6 мм	0,89 мм	17°±1°
886.314.012.018.018	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	018–1,8 мм	018–1,8 мм	1,0 мм	17°±1°
886.314.012.019.021	314 (стандартный)–19 мм	012–Обратноконусная (15°<α<30°)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	019–1,9 мм	021–2,1 мм	1,0 мм	17°±1°
856.314.019.025.012	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	85–алмаз мелкий (красная)	025–2,5 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	15°±1°
856.314.019.025.016	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	85–алмаз мелкий (красная)	025–2,5 мм	016–1,6 мм	1,1 мм	15°±1°
866.314.019.025.012	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	025–2,5 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	15°±1°
866.314.019.025.014	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	025–2,5 мм	016–1,6 мм	1,1 мм	15°±1°
876.314.019.025.012	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	87–алмаз грубый (зелёная)	025–2,5 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	15°±1°
876.314.019.025.014	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	87–алмаз грубый (зелёная)	025–2,5 мм	014–1,4 мм	1,0 мм	15°±1°
876.314.019.025.016	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	87–алмаз грубый (зелёная)	025–2,5 мм	016–1,6 мм	1,1 мм	15°±1°
876.314.019.025.018	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	87–алмаз грубый (зелёная)	025–2,5 мм	018–1,8 мм	1,15 мм	15°±1°
886.314.019.025.012	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	88–алмаз очень грубый (чёрная)	025–2,5 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	15°±1°
886.314.019.025.014	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	88–алмаз очень грубый (чёрная)	025–2,5 мм	014–1,4 мм	1,0 мм	15°±1°
886.314.019.025.016	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	88–алмаз очень грубый (чёрная)	025–2,5 мм	016–1,6 мм	1,1 мм	15°±1°
886.314.019.025.018	314 (стандартный)–19 мм	019–Обратноконусная с буртиком	88–алмаз очень грубый (чёрная)	025–2,5 мм	018–1,8 мм	1,15 мм	15°±1°
836.314.108.030.012	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
836.314.108.030.014	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
836.314.108.030.016	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.108.030.008	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	008–0,8 мм	0,8 мм	–
856.314.108.030.010	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
856.314.108.030.012	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.108.030.014	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.108.030.016	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.108.030.008	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	008–0,8 мм	0,8 мм	–
866.314.108.030.010	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.108.030.012	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.108.030.014	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.108.030.016	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.108.030.008	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	008–0,8 мм	0,8 мм	–
876.314.108.030.010	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.108.030.012	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.108.030.014	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.108.030.016	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.108.030.010	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.108.030.012	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.314.108.030.014	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.108.030.016	314 (стандартный)–19 мм	108–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (1<3,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
836.314.110.060.010	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
836.314.110.060.012	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
836.314.110.060.014	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
836.314.110.060.016	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.110.060.010	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.110.060.012	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.110.060.014	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.110.060.016	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.110.060.018	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.314.110.060.010	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.110.060.012	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.110.060.014	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.110.060.016	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.110.060.018	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.314.110.060.010	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.110.060.012	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.110.060.014	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.110.060.016	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.110.060.018	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.314.110.060.010	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.110.060.012	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.314.110.060.014	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.110.060.016	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.110.060.018	314 (стандартный)–19 мм	110– Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
836.314.111.080.010	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
836.314.111.080.012	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
836.314.111.080.014	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.111.080.010	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.111.080.012	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.111.080.014	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.111.080.016	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.111.080.010	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.111.080.012	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4-6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7-9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10-12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13-15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.314.111.080.014	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.111.080.016	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.111.080.010	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.111.080.012	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.111.080.014	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.111.080.016	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.111.080.012	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.314.111.080.014	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.111.080.016	314 (стандартный)–19 мм	111–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.112.100.012	314 (стандартный)–19 мм	112–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.112.100.014	314 (стандартный)–19 мм	112–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,35	–
866.314.112.100.012	314 (стандартный)–19 мм	112–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.112.100.014	314 (стандартный)–19 мм	112–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,35	–
876.314.112.100.012	314 (стандартный)–19 мм	112–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.112.100.014	314 (стандартный)–19 мм	112–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,35 мм	–
886.314.112.100.014	314 (стандартный)–19 мм	112–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,35 мм	–
856.314.113.120.014	314 (стандартный)–19 мм	113–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (11,5<l<13,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,35 мм	–
866.314.113.120.014	314 (стандартный)–19 мм	113–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (11,5<l<13,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,35 мм	–
876.314.113.120.014	314 (стандартный)–19 мм	113–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,35 мм	–
886.314.113.120.014	314 (стандартный)–19 мм	113–Цилиндрическая (форма) резание боковое и концевое (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,35 мм	–
836.314.130.080.010	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
836.314.130.080.012	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
836.314.130.080.014	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.130.080.010	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.130.080.012	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.130.080.014	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.130.080.016	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.130.080.010	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.314.130.080.012	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.130.080.014	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.130.080.016	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.130.080.010	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.130.080.012	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.130.080.014	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.130.080.016	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.130.080.010	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.130.080.012	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.314.130.080.014	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.130.080.016	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
836.314.131.100.012	314 (стандартный)–19 мм	130–Цилиндрическая, острый конец (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
836.314.131.100.014	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
836.314.131.100.016	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.131.100.012	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.131.100.014	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.131.100.016	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.131.100.012	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.131.100.014	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.131.100.016	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.131.100.012	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.131.100.014	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.131.100.016	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.131.100.014	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.131.100.016	314 (стандартный)–19 мм	131–Цилиндрическая, острый конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.138.030.007	314 (стандартный)–19 мм	138–Цилиндрическая, полусферический конец (1<l<3,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	007–0,7 мм	0,7 мм	–
866.314.138.030.007	314 (стандартный)–19 мм	138–Цилиндрическая, полусферический конец (1<l<3,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	007–0,7 мм	0,7 мм	–
836.314.140.060.014	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.140.060.010	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.140.060.012	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.140.060.014	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.140.060.016	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.140.060.010	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.314.140.060.012	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.140.060.014	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.140.060.016	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.140.060.010	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.140.060.012	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.140.060.014	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.140.060.016	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.140.060.010	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.140.060.012	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.314.140.060.014	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.140.060.016	314 (стандартный)–19 мм	140–Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.141.080.010	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.141.080.012	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.141.080.014	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.141.080.016	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.141.080.010	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.141.080.012	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.141.080.014	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.141.080.016	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.141.080.010	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.141.080.012	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.141.080.014	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.141.080.016	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.141.080.010	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.141.080.012	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.314.141.080.014	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
886.314.141.080.016	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.141.080.018	314 (стандартный)–19 мм	141–Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
836.314.142.100.012	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
836.314.142.100.016	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.142.100.010	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.142.100.012	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.142.100.014	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.142.100.016	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.142.100.010	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.142.100.012	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.142.100.014	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.142.100.016	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.142.100.010	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.142.100.012	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.142.100.014	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.142.100.012	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.314.142.100.014	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.142.100.016	314 (стандартный)–19 мм	142–Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
836.314.160.080.008	314 (стандартный)–19 мм	160–Конусная, заостренная (угол<10°)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	008–0,8 мм	0,8 мм	4,0°±1°
856.314.160.080.008	314 (стандартный)–19 мм	160–Конусная, заостренная (угол<10°)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	008–0,8 мм	0,8 мм	4,0°±1°
856.314.160.080.010	314 (стандартный)–19 мм	160–Конусная, заостренная (угол<10°)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	0,8 мм	4,0°±1°
866.314.160.080.008	314 (стандартный)–19 мм	160–Конусная, заостренная (угол<10°)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	008–0,8 мм	0,8 мм	4,0°±1°
866.314.160.080.010	314 (стандартный)–19 мм	160–Конусная, заостренная (угол<10°)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	0,8 мм	4,0°±1°
876.314.160.080.008	314 (стандартный)–19 мм	160–Конусная, заостренная (угол<10°)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	008–0,8 мм	0,8 мм	4,0°±1°
876.314.160.080.010	314 (стандартный)–19 мм	160–Конусная, заостренная (угол<10°)	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	0,8 мм	4,0°±1°
836.314.164.040.010	314 (стандартный)–19 мм	164–Конусная, заостренная тонкая (3,5<l<6,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	040–4,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
836.314.164.040.012	314 (стандартный)–19 мм	164–Конусная, заостренная тонкая (3,5<l<6,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	040–4,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	5,5°±1,5°
836.314.164.040.014	314 (стандартный)–19 мм	164–Конусная, заостренная тонкая (3,5<l<6,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	040–4,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	5,5°±1,5°

34

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4-6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7-9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10-12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13-15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.314.173.100.014	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
866.314.173.100.016	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
866.314.173.100.018	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
866.314.173.100.021	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	5,5°±1,5°
866.314.173.100.023	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	5,5°±1,5°
876.314.173.100.010	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	3,5°±1,5°
876.314.173.100.012	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	3,5°±1,5°
876.314.173.100.014	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
876.314.173.100.016	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
876.314.173.100.018	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
876.314.173.100.021	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	5,5°±1,5°
876.314.173.100.023	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	5,5°±1,5°
886.314.173.100.012	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	3,5°±1,5°
886.314.173.100.014	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
886.314.173.100.016	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
886.314.173.100.018	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
886.314.173.100.021	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	5,5°±1,5°
886.314.173.100.023	314 (стандартный)–19 мм	173–Конусная (усеченная конусная) (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	5,5°±1,5°
876.314.174.120.014	314 (стандартный)–19 мм	174–Конусная (усеченная конусная) (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
886.314.174.120.016	314 (стандартный)–19 мм	174–Конусная (усеченная конусная) (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
856.314.197.060.010	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
856.314.197.060.012	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
856.314.197.060.014	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
856.314.197.060.016	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
856.314.197.060.018	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
866.314.197.060.010	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
866.314.197.060.012	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
866.314.197.060.018	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
876.314.197.060.010	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
876.314.197.060.012	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
876.314.197.060.014	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
876.314.197.060.016	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
876.314.197.060.018	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
886.314.197.060.012	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
886.314.197.060.014	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
886.314.197.060.016	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
886.314.197.060.018	314 (стандартный)–19 мм	197–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l<7,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
836.314.198.080.012	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
836.314.198.080.014	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
836.314.198.080.016	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
836.314.198.080.018	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
856.314.198.080.012	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
856.314.198.080.014	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
856.314.198.080.016	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
856.314.198.080.018	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
866.314.198.080.012	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
866.314.198.080.014	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
866.314.198.080.016	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
866.314.198.080.018	314 (стандартный)–19 мм	198–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4-6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7-9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10-12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13-15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.314.198.080.025	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	86—алмаз средний (синяя/без цвета)	080—8,0 мм	025—2,5 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
876.314.198.080.012	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87—алмаз грубый (зелёная)	080—8,0 мм	012—1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
876.314.198.080.014	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87—алмаз грубый (зелёная)	080—8,0 мм	014—1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
876.314.198.080.016	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87—алмаз грубый (зелёная)	080—8,0 мм	016—1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
876.314.198.080.018	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87—алмаз грубый (зелёная)	080—8,0 мм	018—1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
876.314.198.080.021	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87—алмаз грубый (зелёная)	080—8,0 мм	021—2,1 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
876.314.198.080.025	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	87—алмаз грубый (зелёная)	080—8,0 мм	025—2,5 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
886.314.198.080.012	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88—алмаз очень грубый (чёрная)	080—8,0 мм	012—1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
886.314.198.080.014	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88—алмаз очень грубый (чёрная)	080—8,0 мм	014—1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
886.314.198.080.016	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88—алмаз очень грубый (чёрная)	080—8,0 мм	016—1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
886.314.198.080.018	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88—алмаз очень грубый (чёрная)	080—8,0 мм	018—1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
886.314.198.080.023	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88—алмаз очень грубый (чёрная)	080—8,0 мм	023—2,3 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
886.314.198.080.025	314 (стандартный)—19 мм	198—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l<9,5 мм)	88—алмаз очень грубый (чёрная)	080—8,0 мм	025—2,5 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
836.314.199.100.010	314 (стандартный)—19 мм	199—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	83—алмаз экстремелкий (жёлтая)	100—10,0 мм	010—1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
836.314.199.100.012	314 (стандартный)—19 мм	199—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	83—алмаз экстремелкий (жёлтая)	100—10,0 мм	012—1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
836.314.199.100.016	314 (стандартный)—19 мм	199—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	83—алмаз экстремелкий (жёлтая)	100—10,0 мм	016—1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
836.314.199.100.018	314 (стандартный)—19 мм	199—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	83—алмаз экстремелкий (жёлтая)	100—10,0 мм	018—1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
856.314.199.100.010	314 (стандартный)—19 мм	199—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	85—алмаз мелкий (красная)	100—10,0 мм	010—1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
856.314.199.100.012	314 (стандартный)—19 мм	199—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	85—алмаз мелкий (красная)	100—10,0 мм	012—1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
856.314.199.100.014	314 (стандартный)—19 мм	199—Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	85—алмаз мелкий (красная)	100—10,0 мм	014—1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
856.314.199.100.016	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
856.314.199.100.018	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
866.314.199.100.010	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
866.314.199.100.012	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
866.314.199.100.014	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
866.314.199.100.016	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
866.314.199.100.018	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
876.314.199.100.010	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
876.314.199.100.012	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
876.314.199.100.014	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
876.314.199.100.016	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
876.314.199.100.018	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
886.314.199.100.010	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
886.314.199.100.012	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
886.314.199.100.014	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
886.314.199.100.016	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	4,5°±1,5°
886.314.199.100.018	314 (стандартный)–19 мм	199–Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
856.314.220.100.012	314 (стандартный)–19 мм	220–Конусная, уполообразный конец, только боковое резание (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
856.314.220.100.014	314 (стандартный)–19 мм	220–Конусная, уполообразный конец, только боковое резание (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
866.314.220.100.014	314 (стандартный)–19 мм	220–Конусная, уполообразный конец, только боковое резание (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4-6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7-9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10-12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13-15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
876.314.220.100.012	314 (стандартный)–19 мм	220–Конусная, куполообразный конец, только боковое резание (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
876.314.220.100.014	314 (стандартный)–19 мм	220–Конусная, куполообразный конец, только боковое резание (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
886.314.220.100.014	314 (стандартный)–19 мм	220–Конусная, куполообразный конец, только боковое резание (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	4,5°±1,5°
856.314.225.030.012	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	5,5°±1,5°
856.314.225.040.014	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	85–алмаз мелкий (красная)	040–4,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	5,5°±1,5°
856.314.225.040.016	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	85–алмаз мелкий (красная)	040–4,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	5,5°±1,5°
856.314.225.040.018	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	85–алмаз мелкий (красная)	040–4,0 мм	018–1,8 мм	1,4 мм	5,5°±1,5°
866.314.225.030.012	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	5,5°±1,5°
866.314.225.040.014	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	5,5°±1,5°
866.314.225.040.016	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	5,5°±1,5°
866.314.225.040.018	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0 мм	018–1,8 мм	1,4 мм	5,5°±1,5°
876.314.225.040.012	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	5,5°±1,5°
876.314.225.040.014	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	040–4,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	5,5°±1,5°
876.314.225.040.016	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	040–4,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	5,5°±1,5°
876.314.225.040.018	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	040–4,0 мм	018–1,8 мм	1,4 мм	5,5°±1,5°
886.314.225.040.014	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	040–4,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	5,5°±1,5°
886.314.225.040.016	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	040–4,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	5,5°±1,5°
886.314.225.040.018	314 (стандартный)–19 мм	225–Обратноконусная (d<l<3d)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	040–4,0 мм	018–1,8 мм	1,4 мм	5,5°±1,5°
856.314.237.030.014	314 (стандартный)–19 мм	237–Груша (d<l<3d)	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	–
866.314.237.030.012	314 (стандартный)–19 мм	237–Груша (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
866.314.237.030.014	314 (стандартный)–19 мм	237–Груша (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	–
866.314.237.030.016	314 (стандартный)–19 мм	237–Груша (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
866.314.237.030.018	314 (стандартный)–19 мм	237–Груша (d<l<3d)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.314.237.030.014	314 (стандартный)–19 мм	237–Груша (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	–
876.314.237.030.016	314 (стандартный)–19 мм	237–Груша (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
876.314.237.030.018	314 (стандартный)–19 мм	237–Груша (d<l<3d)	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.314.237.030.014	314 (стандартный)–19 мм	237–Груша (d<l<3d)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	–
886.314.237.030.018	314 (стандартный)–19 мм	237–Груша (d<l<3d)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
856.314.238.070.012	314 (стандартный)–19 мм	238–Груша (3d<l)	85–алмаз мелкий (красная)	070–7,0 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	–
866.314.238.070.010	314 (стандартный)–19 мм	238–Груша (3d<l)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	070–7,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.238.070.014	314 (стандартный)–19 мм	238–Груша (3d<l)	87–алмаз грубый (зелёная)	070–7,0 мм	014–1,4 мм	1,1 мм	–
836.314.243.080.010	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
836.314.243.080.018	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
856.314.243.080.010	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.243.080.012	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
856.314.243.080.014	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4-6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7-9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10-12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13-15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
856.314.243.080.016	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.243.080.018	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
856.314.243.080.025	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	025–2,5 мм	1,6 мм	–
866.314.243.080.010	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.243.080.012	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
866.314.243.080.014	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.243.080.016	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.243.080.018	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.243.080.025	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	025–2,5 мм	1,6 мм	–
876.314.243.080.010	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.243.080.012	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
876.314.243.080.014	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.243.080.016	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.243.080.018	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.314.243.080.010	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.243.080.012	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
886.314.243.080.014	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.243.080.016	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.243.080.018	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.314.243.080.025	314 (стандартный)–19 мм	243–Пламя, стандартная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	025–2,5 мм	1,6 мм	–
836.314.249.080.010	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
836.314.249.080.012	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
836.314.249.080.014	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
836.314.249.080.016	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.249.080.010	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.249.080.012	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.249.080.014	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.249.080.016	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.249.080.018	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.249.080.010	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.249.080.012	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.249.080.014	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.249.080.016	314 (стандартный)–19 мм	249–Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4-6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7-9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10-12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13-15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.314.249.080.018	314 (стандартный)-19 мм	249-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	080-8,0 мм	018-1,8 мм	1,6 мм	-
876.314.249.080.010	314 (стандартный)-19 мм	249-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	87-алмаз грубый (зелёная)	080-8,0 мм	010-1,0 мм	1,0 мм	-
876.314.249.080.012	314 (стандартный)-19 мм	249-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	87-алмаз грубый (зелёная)	080-8,0 мм	012-1,2 мм	1,2 мм	-
876.314.249.080.014	314 (стандартный)-19 мм	249-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	87-алмаз грубый (зелёная)	080-8,0 мм	014-1,4 мм	1,3 мм	-
876.314.249.080.016	314 (стандартный)-19 мм	249-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	87-алмаз грубый (зелёная)	080-8,0 мм	016-1,6 мм	1,5 мм	-
876.314.249.080.018	314 (стандартный)-19 мм	249-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	87-алмаз грубый (зелёная)	080-8,0 мм	018-1,8 мм	1,6 мм	-
886.314.249.080.010	314 (стандартный)-19 мм	249-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	88-алмаз очень грубый (чёрная)	080-8,0 мм	010-1,0 мм	1,0 мм	-
886.314.249.080.012	314 (стандартный)-19 мм	249-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	88-алмаз очень грубый (чёрная)	080-8,0 мм	012-1,2 мм	1,2 мм	-
886.314.249.080.014	314 (стандартный)-19 мм	249-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	88-алмаз очень грубый (чёрная)	080-8,0 мм	014-1,4 мм	1,3 мм	-
886.314.249.080.016	314 (стандартный)-19 мм	249-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	88-алмаз очень грубый (чёрная)	080-8,0 мм	016-1,6 мм	1,5 мм	-
886.314.249.080.018	314 (стандартный)-19 мм	249-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (7,5<l<9,5 мм)	88-алмаз очень грубый (чёрная)	080-8,0 мм	018-1,8 мм	1,6 мм	-
836.314.250.100.012	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	83-алмаз экстремелкий (жёлтая)	100-10,0 мм	012-1,2 мм	1,2 мм	-
836.314.250.100.014	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	83-алмаз экстремелкий (жёлтая)	100-10,0 мм	014-1,4 мм	1,3 мм	-
836.314.250.100.016	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	83-алмаз экстремелкий (жёлтая)	100-10,0 мм	016-1,6 мм	1,5 мм	-
836.314.250.100.018	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	83-алмаз экстремелкий (жёлтая)	100-10,0 мм	018-1,8 мм	1,6 мм	-
856.314.250.100.010	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	85-алмаз мелкий (красная)	100-10,0 мм	010-1,0 мм	1,0 мм	-
856.314.250.100.012	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	85-алмаз мелкий (красная)	100-10,0 мм	012-1,2 мм	1,2 мм	-
856.314.250.100.014	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	85-алмаз мелкий (красная)	100-10,0 мм	014-1,4 мм	1,3 мм	-
856.314.250.100.016	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	85-алмаз мелкий (красная)	100-10,0 мм	016-1,6 мм	1,5 мм	-
856.314.250.100.018	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	85-алмаз мелкий (красная)	100-10,0 мм	018-1,8 мм	1,6 мм	-
866.314.250.100.010	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	100-10,0 мм	010-1,0 мм	1,0 мм	-
866.314.250.100.012	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	100-10,0 мм	012-1,2 мм	1,2 мм	-
866.314.250.100.014	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	100-10,0 мм	014-1,4 мм	1,3 мм	-
866.314.250.100.016	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	100-10,0 мм	016-1,6 мм	1,5 мм	-
866.314.250.100.018	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	86-алмаз средний (синяя/без цвета)	100-10,0 мм	018-1,8 мм	1,6 мм	-
876.314.250.100.010	314 (стандартный)-19 мм	250-Цилиндрическая, стрельчатый коней, длинная (9,5<l<11,5 мм)	87-алмаз грубый (зелёная)	100-10,0 мм	010-1,0 мм	1,0 мм	-

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
876.314.250.100.012	314 (стандартный)–19 мм	250–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.250.100.014	314 (стандартный)–19 мм	250–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.250.100.016	314 (стандартный)–19 мм	250–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.250.100.018	314 (стандартный)–19 мм	250–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.314.250.100.010	314 (стандартный)–19 мм	250–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.250.100.012	314 (стандартный)–19 мм	250–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.314.250.100.014	314 (стандартный)–19 мм	250–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.250.100.016	314 (стандартный)–19 мм	250–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.250.100.018	314 (стандартный)–19 мм	250–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
836.314.251.120.012	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	120–12,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
836.314.251.120.016	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	120–12,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.251.120.012	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	120–12,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.251.120.014	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.251.120.016	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	120–12,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.251.120.018	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	120–12,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.251.120.012	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	120–12,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.251.120.014	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.251.120.016	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	120–12,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.251.120.018	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	120–12,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.314.251.120.012	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.251.120.014	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.251.120.016	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.251.120.018	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.314.251.120.012	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.314.251.120.014	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.251.120.016	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4-6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7-9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10-12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13-15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
886.314.251.120.018	314 (стандартный)–19 мм	251–Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
836.314.254.050.016	314 (стандартный)–19 мм	254–Почка	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	050–5,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.254.050.016	314 (стандартный)–19 мм	254–Почка	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
856.314.254.050.018	314 (стандартный)–19 мм	254–Почка	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.254.050.014	314 (стандартный)–19 мм	254–Почка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.254.050.016	314 (стандартный)–19 мм	254–Почка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
866.314.254.050.018	314 (стандартный)–19 мм	254–Почка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.314.254.050.016	314 (стандартный)–19 мм	254–Почка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
876.314.254.050.014	314 (стандартный)–19 мм	254–Почка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.254.050.018	314 (стандартный)–19 мм	254–Почка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
836.314.257.030.014	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
836.314.257.030.016	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
836.314.257.030.018	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	030–3,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
836.314.257.030.023	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	030–3,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
856.314.257.030.014	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.257.030.016	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
856.314.257.030.018	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
856.314.257.030.025	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	025–2,5 мм	1,6 мм	–
866.314.257.030.014	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.257.030.016	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
866.314.257.030.018	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.257.030.021	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	–
866.314.257.030.025	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	025–2,5 мм	1,6 мм	–
876.314.257.030.012	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
876.314.257.030.014	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.257.030.016	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
876.314.257.030.018	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.314.257.030.023	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	87–алмаз грубый (зелёная)	030–3,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
886.314.257.030.014	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.257.030.016	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	016–1,6 мм	1,3 мм	–
886.314.257.030.018	314 (стандартный)–19 мм	257–Почка, тонкая	88–алмаз очень грубый (чёрная)	030–3,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
836.314.277.028.012	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	028–2,8 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
836.314.277.028.014	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	028–2,8 мм	014–1,4 мм	1,2 мм	–
836.314.277.034.016	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	034–3,4 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
836.314.277.041.018	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	041–4,1 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
836.314.277.042.023	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	042–4,2 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
856.314.277.025.009	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	85–алмаз мелкий (красная)	025–2,5 мм	009–0,9 мм	0,8 мм	–
856.314.277.028.012	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	85–алмаз мелкий (красная)	028–2,8 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
856.314.277.028.014	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	85–алмаз мелкий (красная)	028–2,8 мм	014–1,4 мм	1,2 мм	–
856.314.277.034.016	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	85–алмаз мелкий (красная)	034–3,4 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.277.041.018	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	85–алмаз мелкий (красная)	041–4,1 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
856.314.277.042.023	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	85–алмаз мелкий (красная)	042–4,2 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
856.314.277.042.025	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	85–алмаз мелкий (красная)	042–4,2 мм	025–2,5 мм	1,6 мм	–
866.314.277.025.009	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	025–2,5 мм	009–0,9 мм	0,8 мм	–
866.314.277.028.012	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	028–2,8 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
866.314.277.028.014	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	028–2,8 мм	014–1,4 мм	1,2 мм	–
866.314.277.034.016	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	034–3,4 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.277.041.018	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	041–4,1 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.277.042.023	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	042–4,2 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
876.314.277.028.012	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	87–алмаз грубый (зелёная)	028–2,8 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
876.314.277.028.014	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	87–алмаз грубый (зелёная)	028–2,8 мм	014–1,4 мм	1,2 мм	–
876.314.277.034.016	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	87–алмаз грубый (зелёная)	034–3,4 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.277.041.018	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	87–алмаз грубый (зелёная)	041–4,1 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.314.277.042.023	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	87–алмаз грубый (зелёная)	042–4,2 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
886.314.277.028.012	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	88–алмаз очень грубый (чёрная)	028–2,8 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
886.314.277.028.014	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	88–алмаз очень грубый (чёрная)	028–2,8 мм	014–1,4 мм	1,2 мм	–
886.314.277.034.016	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	88–алмаз очень грубый (чёрная)	034–3,4 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.277.041.018	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	88–алмаз очень грубый (чёрная)	041–4,1 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.314.277.042.023	314 (стандартный)–19 мм	277–Яйцо	88–алмаз очень грубый (чёрная)	042–4,2 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
836.314.290.100.010	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.290.100.010	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.290.100.012	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.290.100.014	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.290.100.016	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
856.314.290.100.018	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.290.100.010	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.290.100.012	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.290.100.014	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.290.100.016	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
866.314.290.100.018	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.314.290.100.010	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.290.100.012	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
876.314.290.100.014	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.290.100.016	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
876.314.290.100.018	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.314.290.100.010	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.290.100.012	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.314.290.100.014	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.290.100.016	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
886.314.290.100.018	314 (стандартный)–19 мм	290–Торпеда цилиндрическая (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
836.314.291.120.012	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	120–12,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
836.314.291.120.016	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	120–12,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
856.314.291.120.010	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	120–12,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.291.120.012	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	120–12,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
856.314.291.120.014	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.291.120.016	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	120–12,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
866.314.291.120.012	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	120–12,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
866.314.291.120.014	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.291.120.016	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	120–12,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
876.314.291.120.012	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
876.314.291.120.014	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.291.120.016	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	87–алмаз грубый (зелёная)	120–12,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
886.314.291.120.012	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	012–1,2 мм	1,2 мм	–
886.314.291.120.014	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.291.120.016	314 (стандартный)–19 мм	291–Торпеда цилиндрическая (11,5<l<13,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	120–12,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
856.314.295.030.007	314 (стандартный)–19 мм	295–Торпеда конусная (l<3,5 мм)	85–алмаз мелкий (красная)	030–3,0 мм	007–0,7 мм	0,6 мм	4,5°±1,5°
866.314.295.030.007	314 (стандартный)–19 мм	295–Торпеда конусная (l<3,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	007–0,7 мм	0,6 мм	4,5°±1,5°
866.314.295.030.012	314 (стандартный)–19 мм	295–Торпеда конусная (l<3,5 мм)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	030–3,0 мм	012–1,2 мм	1,0 мм	4,5°±1,5°
886.314.299.100.014	314 (стандартный)–19 мм	299–Торпеда конусная (9,5<l<11,5 мм)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,2 мм	4,5°±1,5°
836.314.464.040.018	314 (стандартный)–19 мм	464–Луковичеобразный	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	040–4,0	018–1,8 мм	1,6 мм	–
856.314.464.040.018	314 (стандартный)–19 мм	464–Луковичеобразный	85–алмаз мелкий (красная)	040–4,0	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.464.040.018	314 (стандартный)–19 мм	464–Луковичеобразный	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	040–4,0	018–1,8 мм	1,6 мм	–
856.314.465.050.018	314 (стандартный)–19 мм	465–Межзубной бор	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.465.050.016	314 (стандартный)–19 мм	465–Межзубной бор	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
866.314.465.050.018	314 (стандартный)–19 мм	465–Межзубной бор	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.314.465.050.018	314 (стандартный)–19 мм	465–Межзубной бор	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
856.314.494.100.018	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.494.100.012	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
866.314.494.100.014	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,2 мм	–
866.314.494.100.016	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.314.494.100.018	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.494.100.023	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
876.314.494.100.012	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
876.314.494.100.014	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,2 мм	–
876.314.494.100.016	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
876.314.494.100.018	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.314.494.100.023	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
886.314.494.100.010	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.494.100.012	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
886.314.494.100.014	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,2 мм	–
886.314.494.100.016	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
886.314.494.100.018	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.314.494.100.023	314 (стандартный)–19 мм	494–Сферическая с концевым буртиком, длинная	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
856.314.507.060.018	314 (стандартный)–19 мм	507–Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
856.314.507.080.023	314 (стандартный)–19 мм	507–Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
866.314.507.060.018	314 (стандартный)–19 мм	507–Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
866.314.507.080.023	314 (стандартный)–19 мм	507–Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
876.314.507.060.018	314 (стандартный)–19 мм	507–Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
876.314.507.080.023	314 (стандартный)–19 мм	507–Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
886.314.507.080.023	314 (стандартный)–19 мм	507–Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
856.314.508.060.016	314 (стандартный)–19 мм	508–Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	85–алмаз мелкий (красная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
856.314.508.080.021	314 (стандартный)–19 мм	508–Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
866.314.508.060.016	314 (стандартный)–19 мм	508–Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
866.314.508.080.021	314 (стандартный)–19 мм	508–Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
876.314.508.060.016	314 (стандартный)–19 мм	508–Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	87–алмаз грубый (зелёная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
876.314.508.080.021	314 (стандартный)–19 мм	508–Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
886.314.508.060.016	314 (стандартный)–19 мм	508–Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	88–алмаз очень грубый (чёрная)	060–6,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
886.314.508.080.021	314 (стандартный)–19 мм	508–Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	4,5°±1,5°
856.314.539.080.010	314 (стандартный)–19 мм	539–Бор, иглообразный, короткий, длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.539.080.007	314 (стандартный)–19 мм	539–Бор, иглообразный, короткий, длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	007–0,7 мм	0,7 мм	–
866.314.539.080.010	314 (стандартный)–19 мм	539–Бор, иглообразный, короткий, длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.539.080.010	314 (стандартный)–19 мм	539–Бор, иглообразный, короткий, длинная шейка	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
836.314.540.080.010	314 (стандартный)–19 мм	540–Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	83–алмаз экстремелкий (жёлтая)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.540.080.009	314 (стандартный)–19 мм	540–Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	009–0,9 мм	0,9 мм	–
856.314.540.080.010	314 (стандартный)–19 мм	540–Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.540.080.010	314 (стандартный)–19 мм	540–Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.540.080.010	314 (стандартный)–19 мм	540–Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	87–алмаз грубый (зелёная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.540.080.010	314 (стандартный)–19 мм	540–Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	88–алмаз очень грубый (чёрная)	080–8,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.551.090.008	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	090–9,0 мм	008–0,8 мм	0,8 мм	–
866.314.551.090.010	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	090–9,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.551.090.012	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	090–9,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
866.314.551.090.014	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	090–9,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.551.090.016	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	090–9,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.551.090.008	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	87–алмаз грубый (зелёная)	090–9,0 мм	008–0,8 мм	0,8 мм	–
876.314.551.090.010	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	87–алмаз грубый (зелёная)	090–9,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.551.090.012	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	87–алмаз грубый (зелёная)	090–9,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
876.314.551.090.014	314–На турбинный наконечник (стандартный)	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	87–алмаз грубый (зелёная)	090–9,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.551.090.016	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	87–алмаз грубый (зелёная)	090–9,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.551.090.010	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	88–алмаз очень грубый (чёрная)	090–9,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.551.090.012	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	88–алмаз очень грубый (чёрная)	090–9,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
886.314.551.090.014	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	88–алмаз очень грубый (чёрная)	090–9,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.551.090.016	314 (стандартный)–19 мм	551–Бор, конусный с шариком, только боковое резание	88–алмаз очень грубый (чёрная)	090–9,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.004.050.007	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	007–0,7 мм	0,7 мм	–
856.314.004.050.010	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.314.004.050.012	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
856.314.004.050.014	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.314.004.050.016	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
856.314.004.050.018	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
856.314.004.050.021	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	–
856.314.004.050.023	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
856.314.004.050.025	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	85–алмаз мелкий (красная)	050–5,0 мм	025–2,5 мм	1,6 мм	–
866.314.004.050.007	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	007–0,7 мм	0,7 мм	–
866.314.004.050.010	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.314.004.050.012	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
866.314.004.050.014	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.314.004.050.016	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
866.314.004.050.018	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.314.004.050.021	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	–
866.314.004.050.023	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
866.314.004.050.025	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	050–5,0 мм	025–2,5 мм	1,6 мм	–
876.314.004.050.010	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.314.004.050.012	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
876.314.004.050.014	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.314.004.050.016	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
876.314.004.050.018	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
876.314.004.050.021	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	–
876.314.004.050.023	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
876.314.004.050.025	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	87–алмаз грубый (зелёная)	050–5,0 мм	025–2,5 мм	1,6 мм	–
886.314.004.050.010	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	88–алмаз очень грубый (чёрная)	050–5,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.314.004.050.012	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	88–алмаз очень грубый (чёрная)	050–5,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
886.314.004.050.014	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	88–алмаз очень грубый (чёрная)	050–5,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.314.004.050.016	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	88–алмаз очень грубый (чёрная)	050–5,0 мм	016–1,6 мм	1,5 мм	–
886.314.004.050.018	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	88–алмаз очень грубый (чёрная)	050–5,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.314.004.050.021	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	88–алмаз очень грубый (чёрная)	050–5,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	–
886.314.004.050.023	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	88–алмаз очень грубый (чёрная)	050–5,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
886.314.004.050.025	314 (стандартный)–19 мм	004–Сферическая длинная шейка	88–алмаз очень грубый (чёрная)	050–5,0 мм	025–2,5 мм	1,6 мм	–
856.316.001.100.010	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
856.316.001.100.012	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
856.316.001.100.014	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
856.316.001.100.016	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
856.316.001.100.018	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	85–алмаз мелкий (красная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.316.001.100.010	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
866.316.001.100.012	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
866.316.001.100.014	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
866.316.001.100.016	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
866.316.001.100.018	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
866.316.001.100.021	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	–
866.316.001.100.023	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	86–алмаз средний (синяя/без цвета)	100–10,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
876.316.001.100.010	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
876.316.001.100.012	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
876.316.001.100.014	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
876.316.001.100.016	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
876.316.001.100.018	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–

Код по ISO	Кодовый номер хвостовика (4–6 знак) Общая длина, L	Номер формы рабочей части (7–9 знак)	Размер алмазного зерна (цветовая кодировка) (1, 2 знак)	Длина рабочей части, l (10–12 знак)	Диаметр рабочей части, d ₁ (13–15 знак)	Диаметр шейки, d ₂	Угол рабочей части, α
876.316.001.100.021	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	–
876.316.001.100.023	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	87–алмаз грубый (зелёная)	100–10,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–
886.316.001.100.010	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	010–1,0 мм	1,0 мм	–
886.316.001.100.012	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	012–1,2 мм	1,1 мм	–
886.316.001.100.014	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	014–1,4 мм	1,3 мм	–
886.316.001.100.016	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	016–1,6 мм	1,6 мм	–
886.316.001.100.018	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	018–1,8 мм	1,6 мм	–
886.316.001.100.021	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	021–2,1 мм	1,6 мм	–
886.316.001.100.023	316 (экстрадлинный)–25 мм	001–Сферическая (круглая)	88–алмаз очень грубый (чёрная)	100–10,0 мм	023–2,3 мм	1,6 мм	–

Примечание: показатель «Угол рабочей части, α» применим только для боров, имеющих коническую или обратноконусную рабочую часть

Рисунок Б.3 – Боры диаметром 1,6_{-0,01} мм цилиндрические с коническим и сферическим торцем (хвостовик типа 3 – для закрепления в турбинных наконечниках)

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки боров входит:

- боры одного наименования – 1 - 10 шт.
- эксплуатационная документация – 1 экз.

7 МАРКИРОВКА

7.1 Маркировка боров производится в соответствии с ГОСТ 19126-2007, ГОСТ Р ИСО 7711-1-2010 и требований настоящего раздела.

Непосредственно на хвостовик позади рабочей части, за пределами посадочной длины может быть нанесено цветовое кодирование по ГОСТ Р ИСО 7711-3-2010. Цвет кода соответствующей зернистости алмазного порошка приведён в Приложении Г ТУ 32.50.11-013-65512780-2018.

7.2 На потребительской упаковке имеется следующая информация:

- наименование и/или товарный знак изготовителя или дистрибьютора;
 - обозначение ТУ 32.50.11-013-65512780-2018;
 - номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;
 - обозначение боров – пятнадцатизначный код, в соответствии с приложением Г ТУ 32.50.11-013-65512780-2018;
 - материал рабочей части;
 - тип хвостовика с ИСО 1797-1;
 - номер формы рабочей части по ГОСТ Р ИСО 6360-2;
 - номинальный диаметр;
 - размер алмазного зерна по ГОСТ Р ИСО 7711-3 (при необходимости);
 - номер партии;
 - год выпуска;
 - количество;
 - штамп ОТК
- 7.3 На каждой коробке должно быть указано:
- наименование и/или товарный знак изготовителя или дистрибьютора;
 - обозначение ТУ 32.50.11-013-65512780-2018;
 - номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;
 - обозначение боров – пятнадцатизначный код, в соответствии с приложением Г ТУ 32.50.11-013-65512780-2018;
 - номер партии;
 - штамп ОТК;
 - количество;
 - дата выпуска.

7.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96. На внешней поверхности транспортной тары нанесены манипуляционные знаки, соответствующие наименованию «Беречь от влаги».

8 УПАКОВКА

8.1 Упаковка – по ГОСТ 19126-2007 с учетом требований настоящего раздела.

8.2 Перед упаковыванием поверхность боров подготовлена по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 1(Л).

8.3 Боры каждого типоразмера в количестве от одной до десяти штук уложены в потребительскую упаковку – пластиковые футляры, изготовленные из плёнки поливинилхлоридной марки П-73ЭМ (ГОСТ 25250-88), либо в полипропиленовые коробочки.

8.4 Для транспортирования боры в потребительской таре уложены в картонные коробки по ГОСТ 33781-2016, выложенную внутри упаковочной бумагой по ГОСТ 8273-75. В качестве заполнителя может быть использован гофрированный картон по ГОСТ Р 52901-2007 или любой другой амортизационный материал

8.5 В каждую коробку вложена эксплуатационная документация, выполненная в соответствии с ГОСТ 2.601-2013.

8.6 Транспортная упаковка боров – по ГОСТ 19126-2007.

8.7 Масса брутто не более 20 кг.

9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 Перед работой с борами ознакомьтесь с инструкцией по применению

9.2 Применять боры в зависимости от их назначения.

9.3 Боры многократного применения. Перед работой боры необходимо, продезинфицировать, подвергнуть циклу предстерилизационной очистки и стерилизации

9.4 Вставлять боры в наконечник без усилия.

9.5 При работе соблюдать рекомендованное число оборотов. Рекомендуемая частота вращения боров (об/мин) в зависимости от диаметра рабочей части (d) представлена в таблице 2
Таблица 2 – Рекомендуемая частота вращения боров (об/мин) в зависимости от диаметра рабочей части

Диаметр рабочей части, ISO, Ø1/10 мм	Тип 1 (для закрепления в угловых наконечниках), об/мин	Тип 2 (для закрепления в прямых наконечниках), об/мин	Тип 3 (для закрепления в турбинных наконечниках), об/мин
007-014	160 000	50 000	300 000
016	160 000	50 000	280 000
018	160 000	50 000	250 000
021	160 000	50 000	210 000
023	160 000	50 000	190 000
025	120 000	50 000	180 000
027	120 000	50 000	–
029	120 000	50 000	–
031	120 000	50 000	–
033	120 000	50 000	–
035	120 000	50 000	120 000
040	–	50 000	–
042	–	50 000	–
050	–	40 000	–
060	–	40 000	–

10 ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

10.1 Показание к применению – использовать боры в соответствии с их назначением.

10.2 Противопоказание – не применять боры не по назначению, не использовать повреждённые боры.

10.3 Возможные побочные эффекты – отсутствуют.

11 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

11.1 К эксплуатации боров допускаются лица, знающие правила их эксплуатации.

11.2 При работе с борами использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор или маску, защитные очки.

11.3 Не использовать боры не прошедшие дезинфекцию, цикл предстерилизационной очистки и стерилизацию.

11.4 Не использовать повреждённые боры.

11.5 Не использовать боры с признаками коррозии.

11.6 Не ронять, не бросать боры во избежание поломок, повреждений, механических разрушений и потери абразивной поверхности бора.

11.7 Не наклонять боры и не использовать их в качестве рычага во время работы.

11.8 При работе и смене боров не брать рукой за рабочую часть.

12 ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЕГО ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

12.1 Боры поставляются в нестерильном виде. Боры являются медицинскими изделиями многократного применения и, в случаях, когда их использование предполагает контакт с пациентом, перед каждым применением подлежат обработке в следующей последовательности:

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Дезинфекции подлежат не только боры, предназначенные для повторного использования, но и использованные боры, предназначенные для утилизации.

Для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации боров применяют разрешенные в установленном порядке дезинфицирующие, моющие, стерилизующие средства и оборудование, режимы применения которых допускают их применение для металлических медицинских инструментов (боров), или специально разработанное для алмазных стоматологических инструментов.

Предстерилизационная очистка осуществляется после дезинфекции или может быть совмещена с дезинфекцией в одном процессе и может проводиться ручным или механизированным способами (в соответствии с инструкцией по применению, прилагаемой к конкретному оборудованию). Процедуры обработки проводятся в соответствии с рекомендованными методами и режимами применения соответствующих средств и оборудования. Их эффективность должна быть проверена и подтверждена. Они не должны вызывать изменения внешнего вида и снижения эксплуатационных качеств боров.

ВНИМАНИЕ! Необходимо строго соблюдать режимы обработки. Не рекомендуется оставлять боры в воде или агрессивных растворах на срок, превышающий указанное в инструкции время.

Ограничения при проведении повторной обработки. Повторная обработка не ухудшает свойств боров. Срок службы боров – не менее 20 мин непрерывного машинного времени, окончание срока службы определяется износом и повреждениями при использовании.

12.2 Изделие: боры стоматологические с алмазными головками «Стимул» по ТУ 32.50.13-013-65512780-2018

Метод: Паровой

Ограничения при проведении повторной обработки	Повторная обработка не ухудшает свойств боров. За предельное состояние принимается частичная потеря абразивной поверхности бора, которая ведёт к росту температуры в рабочей зоне или поломка бора.
Подготовка перед обработкой на месте эксплуатации	Оборудование: тканевые салфетки Метод: Извлечь боры из стоматологического наконечника после использования или из товарной упаковки, если новые. При необходимости с поверхности боров удаляют видимые загрязнения с помощью тканевых салфеток.

Дезинфекция	ДЕЗИНФЕКЦИЯ, НЕ СОВМЕЩЕННАЯ С ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ Оборудование: лоток, дистиллированная вода Метод: Боры полностью погружают в лоток с дистиллированной водой с температурой 99 °С и кипятят 30 минут. Воду сразу сливают и проводят предстерилизационную очистку.
Предстерилизационная очистка	Оборудование: 0,5%-й раствор средства «Биолот», щетка с нейлоновой щетиной, тканевая салфетка, проточная питьевая вода, дистиллированная вода, емкость Метод: Проводят в эмалированной или пластиковой емкости, погружая боры в биологически активное моющее средство типа «Биолот» (0,5 %-й раствор, температура раствора (40+5)°С) и выдерживают в течение 15 минут после чего ручным способом с помощью щетки или тканевой салфетки отмывают загрязнения в течение 0,5-2 мин. Затем промывают чистой проточной водой по ГОСТ Р 51232-98 в течение 5 мин (до полного отмывания моющего средства), ополаскивают дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72 0,5 мин и проводят стерилизацию.
Сушка	Если стерилизация будет осуществляться воздушным методом, то после предстерилизационной очистки боры необходимо высушить в сушильном шкафу при температуре (85±5)°С до полного исчезновения влаги..
Техническое обслуживание	Не требуется
Проверка и испытания	Весь инструмент должен быть проверен на наличие повреждений и износа. Режущая часть должна быть равномерно покрыта алмазным зерном без выбоин, хвостовик без зазубрин. Длинный тонкий инструмент необходимо проверить на наличие искривлений.
Упаковка для стерилизации	Используют бумажные, пластиковые, комбинированные и другие стерилизационные упаковочные материалы, разрешенные для этой цели в установленном порядке и в соответствии с инструкциями по их применению. При паровом методе, кроме того, можно использовать стерилизационные коробки с фильтрами. При отсутствии централизованной системы обработки допускается стерилизовать термическими или химическими методами боры в неупакованном виде - в открытых лотках в случае их последующего немедленного использования без хранения. ВНИМАНИЕ! Во время стерилизации (воздушным или паровым методом) боров без упаковки их располагают так, чтобы они не касались друг друга.
Стерилизация	Стерилизуют паровым методом в паровом стерилизаторе (автоклаве) под давлением 0,21 МПа и при температуре 135°С. Время выдержки – не менее 5 мин., но не более 7 минут. Допускается применять гласперленовые стерилизаторы в соответствии с режимами, указанными в руководстве по эксплуатации. ВНИМАНИЕ! Предпочтительными методами стерилизации боров являются паровой и воздушный.
Контроль стерилизации	Контроль стерилизации проводится на основании действующего в стране законодательства и, как правило, включает контроль работы стерилизаторов, проверку значений параметров режимов стерилизации и оценку ее эффективности на основании результатов бактериологических исследований.
Хранение	На стерильном столе или во вскрытых стерилизационных коробках не более 6 часов. Стерилизованные химическим методом и отмытые

	стерильной водой изделия могут храниться в стерилизационной коробке с фильтром не более 3 суток. <i>ВНИМАНИЕ! Дата стерилизации и срок использования должны быть указаны на упаковке. Не допускать использование боров после истечения срока хранения после стерилизации.</i>
Дополнительная информация	При стерилизации различного инструмента в одном стерилизаторе необходимо убедиться, что максимальная загрузка не была превышена.
Реквизиты производителя	Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 54, оф.403 тел. +7(843) 561-15-46, факс: +7(843)567-15-19, ООО «Стимул+».
Примечание: Инструкция, приведенная выше, была валидирована производителем как приемлемая для подготовки боров для повторного использования. Организация (или лицо), занимающаяся обработкой, несёт ответственность за проведение повторной обработки и использование оборудования, материалов и привлечение персонала, обеспечивающих необходимый результат. Процесс должен быть валидирован и проверен. Любые отклонения от процедуры, установленной в инструкции, должны быть оценены с точки зрения эффективности и возможных неблагоприятных последствий	

13 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

13.1 Транспортирование боров в упаковке производителя производится всеми видами крытого транспорта, кроме неотапливаемых отсеков самолетов и морского транспорта в соответствии с ГОСТ 19126-2007 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

13.2 Условия транспортирования боров – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69:

13.3 Условия хранения боров – по группе 1 (Л) ГОСТ 15150-69.

13.4 Воздух помещения для хранения боров не должен содержать коррозионно-активных примесей.

14 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

14.1 Утилизировать боры в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б.

15 ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

15.1 Боры при эксплуатации, транспортировании и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

15.2 При работе с борами специальных мер по защите природной среды от вредных воздействий не требуется.

16 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

– ГОСТ 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»;

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ Р ИСО 6360-1-2012 «Стоматология. Система цифрового кодирования вращающихся инструментов. Часть 1. Общие характеристики»;

– ГОСТ Р ИСО 6360-2-2012 «Стоматология. Система цифрового кодирования вращающихся инструментов. Часть 2. Формы»;

– ГОСТ Р ИСО 6360-4-2012 «Стоматология. Система цифрового кодирования вращающихся инструментов. Часть 4. Специальные характеристики алмазных боров»;

– ГОСТ Р ИСО 7711-1-2010 «Инструменты стоматологические вращающиеся. Инструменты алмазные. Часть 1. Требования, размеры, маркировка и упаковка»;

– ГОСТ Р ИСО 1797-2018 «Инструменты стоматологические. Хвостовики»;

– ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия»;

– ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

– ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия»;

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;
- ГОСТ 5632-2014 «Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»;
- ГОСТ 9206-80 «Порошки алмазные. Технические условия»;
- ГОСТ 492-2006 «Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. Марки»;
- ТУ 2312-003-76174671-2005 «Эмали ПФ-115 «Универсал»»;
- ГОСТ Р ИСО 7711-3-2010 «Инструменты стоматологические вращающиеся. Инструменты алмазные. Часть 3. Размеры зерен, обозначения и цветовой код»;
- ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;
- ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»;
- ГОСТ 25250-88 «Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия»;
- ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия»;
- ГОСТ 8273-75 «Бумага оберточная. Технические условия»;
- ГОСТ Р 52901-2007 «Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия»;
- ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;
- ГОСТ 18321-73 «Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции»;
- ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества»;
- ГОСТ Р ИСО 8325-2010 «Инструменты стоматологические вращающиеся. Методы испытаний»;
- ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»;
- ГОСТ 8.051-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм»;
- ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;
- ГОСТ 9378-93 «Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия»;
- ГОСТ 19300-86 «Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры»;
- ГОСТ 23677-79 «Твердомеры для металлов. Общие технические требования»;
- МУ 287-113 от 30.12.98 «Методические указания по дезинфекции, предварительной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- Приказ Минздрава России от 06.06.2012г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

17 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16.1 Средний ресурс работы (надежность) боров не менее 20 минут машинного времени.

За средний ресурс принимается частичная потеря абразивной поверхности бора.

16.2 Гарантийный срок эксплуатации боров – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

16.3 Гарантийный срок хранения боров – 1 год со дня отгрузки потребителю.

18 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Боры соответствуют ТУ 32.50.11-013-65512780-2018 и признаны годными для эксплуатации.

ОТК _____

Дата изготовления _____

19 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке с этикеткой предъявляются по адресу производителя: 420088, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 54, оф.403, тел. +7(843) 561-15-46, факс: +7(843)567-15-19, ООО «Стимул+».

20 СТРУКТУРА ЦИФРОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ БОРОВ

20.1 Цифровое обозначение боров состоит из пятнадцати цифр, обозначающих материал и связку, форму и размеры рабочей части, а также тип хвостовика.

20.2. Структура цифрового обозначения боров предусматривает описание только одного типоразмера:

XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
I	II	III	IV	V

I – код материала рабочей части, размер зернистости, связующий материал:

а) первые две цифры – код материала рабочей части и размер зернистости:

83 – алмаз экстремелкий (цветовой код – желтый);

85 – алмаз мелкий (цветовой код – красный);

86 – алмаз средний (цветовой код – синее/без кодировки);

87 – алмаз грубый (цветовой код – зеленый);

88 – алмаз очень грубый (цветовой код – черный).

б) третья цифра: **6** – наносимый гальваническим способом в виде покрытия металлический связующий материал.

II – код исполнения хвостовика состоит:

а) первые две цифры – обозначение типа хвостовика:

20 – для типа 1;

10 – для типа 2;

31 – для типа 3.

б) третья цифра – обозначение общей длины бора: 3 – короткая; 4 – стандартная; 5 – длинная; 6 – экстрадлинная.

III – код формы рабочей части по ГОСТ Р ИСО 6360-2 и КД:

– **001** – сферическая;

– **002** – сферическая с буртиком;

–

– **250** – цилиндрическая со стрельчатым концом и т.д.

IV – длина рабочей части l по ГОСТ Р ИСО 6360-4 и КД:

Длину рабочей части приводят с шагом 0,1 мм. Пример – бор с рабочей частью 6,0 мм идентифицируется кодовым номером **060**; с рабочей частью 10,0 мм – **100**.

V – код диаметра рабочей части d по ГОСТ Р ИСО 7711-1 и КД:

Бор с диаметром рабочей части (номинальным размером) 1,4 мм идентифицируется кодовым номером **014**.

20.3 Пример цифрового обозначения бора цилиндрической формы со стрельчатым концом (**250**), длиной рабочей части l = 10 мм (**100**); номинальным диаметром (номинальным размером) рабочей части d = 1,2 мм (**012**); с хвостовиком типа 2 (**10**); общей длиной L = 44,5 мм (**4**); с алмазоносным слоем из алмазного порошка на металлической связке (**866**):

866.104.250.100.012

В данном документе прошито и
пронумеровано 55 листа (-ов)



Директор

ООО "Стимул+"

Колоколов С.В.