

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «ПКФ «Орбита»


Анисимов А.А.
« 10 » *декабря* 2020 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Медицинское покрытие для закрытия ран различной
этиологии ОтРАН по ТУ 32.50.50-001-96660936-2018**

(версия 3)

**Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-коммерческая фирма «Орбита» (ООО «ПКФ «Орбита»)
Адрес местонахождения: Россия, 390044, Рязанская область, г. Рязань, проезд
2-й Мервинский, д. 8.**

Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид реактор-пакета с полиольным компонентом А и изоцианатным компонентом Б на примере «Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии: ОТРАН 10»



рис. 1



рис. 2

Страна-изготовитель Россия
Предприятие-изготовитель ООО «ГКФ «Орбита»
Юридический адрес Россия, Рязанская область,
г. Рязань, 2-й Мервинский проезд, д. 8
Адрес производства Россия, Рязанская область,
Рыбновский район, дер. Баграмово, лит. ГП
Телефон/факс: 8 800 700 44 91
Email: orbita_sekret@mail.ru
<http://pkf-orbita.ru/>



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Остановить кровотечение, обработать и увлажнить рану. Неповрежденная кожа вокруг раны должна быть сухой. Взять двухслойный пакет в руки как показано на рисунке 1. Большие пальцы вдоль пакета, красный уголок слева внизу. С усилием сжимая правый пакет дождаться расхождения участка шва в нижней части между панетками. Поочередно сжимая панеты энергично перемещать содержимое (15-20 сек) из пакета в пакет до потепления и увеличения в объеме, после чего **НЕМЕДЛЕННО** надорвать нижний уголок по насечке (рис. 2) и нанести пену прямо на рану от центра к краям, захватывая по 1-3 см сухой кожи вокруг раны. Покрытие застывает за 4-6 минут и не требует дополнительной фиксации на ране. Покрытие держится на ране до 5-7 дней, затем отслаивается и удаляется легко и безболезненно. В случае необходимости удалить, отслаивая его по краям от не поврежденной кожи. «Ране покрытие не приклеивается. В случае охлаждения ниже 0 °С поместить невскрытый пакет в горячую воду (30-85 °С) на 10 мин. Применять после остывания. Площадь, закрываемая одним пакетом до 100 кв. см.

НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повреждение кожных покровов, в том числе:

- свежие и длительно незаживающие раны;
- ожоги I-II-A степени;
- трофические язвы;
- пролежни;
- потертости.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- артериальное кровотечение;
- обильное гноетечение;
- индивидуальная непереносимость.

Перед применением прочитайте инструкцию

СОСТАВ:

Компонент А - 15 мл
Полуэфир прост. би «Полпрел 3002-2-610» - 12,4 мл
Воды дистиллированной - 0,2 мл
Гробила полуэфир «Полпрел 4502» - 0,15 мл
Триэтаноламин - 0,15 мл
Триэтилкарбонат - 0,15 мл
Диглицерин - 0,15 мл
Динатриглицерофосфат - 0,27 мл
Тиксотин - 0,03 мл
Оксид алюминия - 1,6 мл

Компонент В - 5 мл
Дифенилметандиизоцианат - 5 мл

ВНИМАНИЕ!

Избегать контакта с не застывшим покрытием!
Бережно от детей!
Не допускается применение в случае нарушения целостности упаковки!

ТУ 32 50 50-001-96660936-2018

в исполнении ОТРАН 10

Р/У № _____ от _____

Для однократного применения

Условия хранения - Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С

Срок годности
Номер партии
Дата изготовления
Годен до



ОТРАН®

Медицинское покрытие для закрытия ран
различной этиологии

ОТРАН

Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии

НЕТОКСИЧНО. АЛЕРГИЧНО.
ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Перевязки открытых ран, в том числе:
- свежие и длительно незаживающие раны;
- ожоги II–IIIА степени;
- трофические язвы;
- пролежни;
- потертости.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- артериальное кровотечение;
- обильная гнойность;
- индивидуальная непереносимость.

Перед применением прочтите инструкцию

СОСТАВ

Компонент А – 20 мл	Компонент В – 10 мл
Полупроводящий полимер 9003-2-450 – 24,8 мм	Дифенилгидрокарбонат – 10 мг
Ваза дисперсионная – 8 мл	
Пробирка полимерная с пипеткой 50/75 – 53 шт	
Бинт стерильный – 0,3 м	
Бинт эластичный – 0,3 м	
Диск изопропиловый – 0,54 мм	
Диск изопропиловый – 0,54 мм	
Ткань нетканая – 0,08 мм	
Застежка пластиковая – 2 шт	

РИС. 1

РИС. 2

Страна изготовитель Россия
Предприятие-изготовитель ООО «Орбита»
Юридический адрес: Россия, Рязанская область,
г. Рязань, 2-й Мирнинский проезд, д. 8
Адрес производства: Россия, Рязанская область,
Рыбновский район, дер. Баграмово, лит. П)
Телефон/Факс: 8 800 700 44 91
Email: orbita_solex@mail.ru
<http://orbita-orbita.ru/>

Иметь контакт с не застывшим покрытием!
Беречь от детей!
Не допускать применения в случае нарушения целостности упаковки!

ТУ 32.50.50-001-96660926-2018
в исполнении ОТРАН 20

РУ № _____ от _____
Для однократного применения

Условия хранения - Хранить при температуре от +5° до +40° С

Срок годности _____
Номер партии _____
Дата изготовления _____
Говед № _____


Вид медицинского изделия «Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии: ОтРАН 10» сразу после смешивания (готового к применению).



Вид медицинского изделия «Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии: ОтРАН 10» спустя 20 минут после смешивания



Вид медицинского изделия «Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии: ОтРАН 10» спустя 20 минут после смешивания (в разрезе)

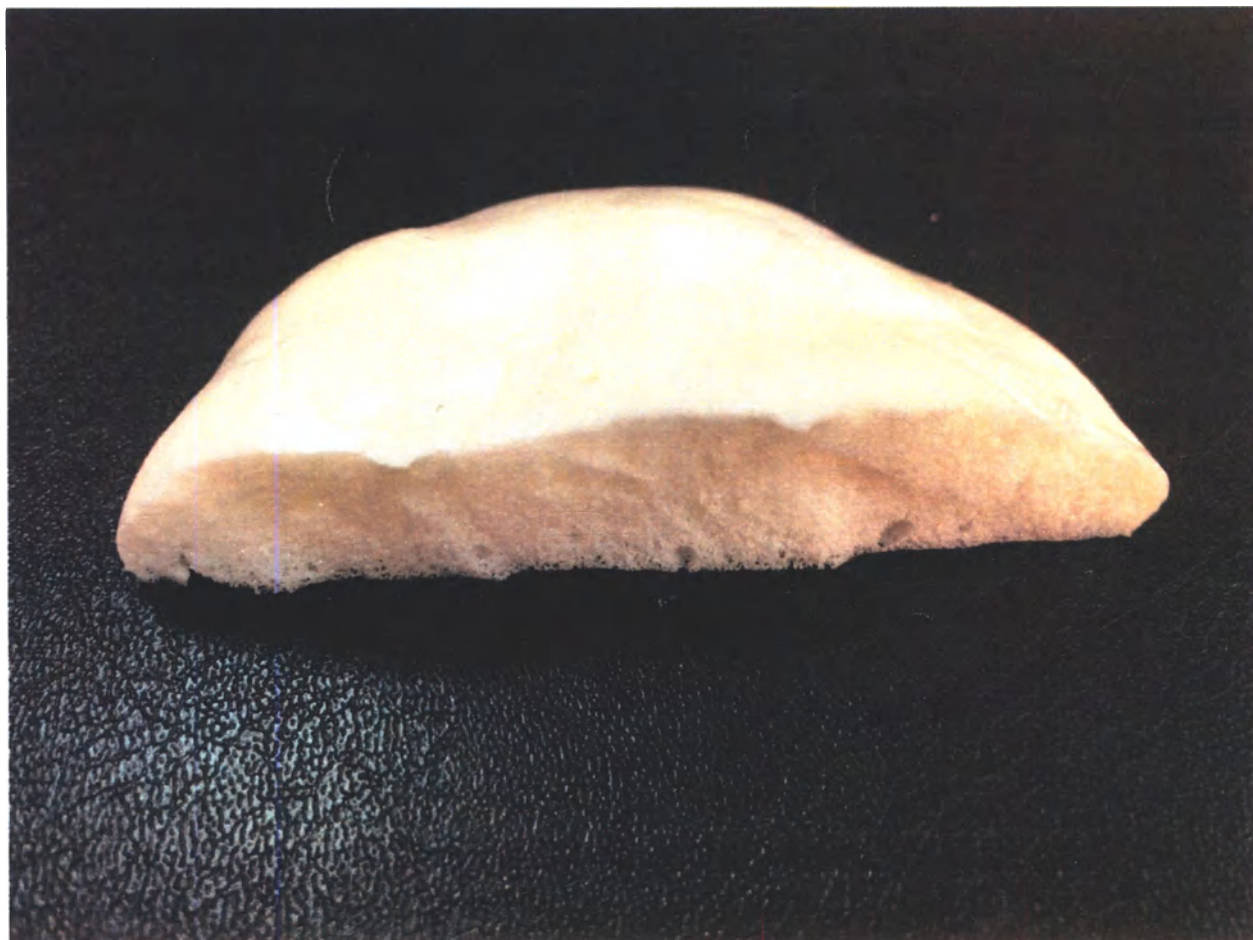

Общий вид потребительской упаковки в виде блистера для «Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии, варианты исполнения ОтРАН 5-1»



OTRAN®

Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии

OTRAN 20-1

НЕТОКСИЧНО. АГИРОТНО.
ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повреждение кожных покровов, в том числе:

- ссадины и длительно незаживающие раны
- ожоги II-IIIА степеней
- трофические язвы
- пролежни
- потертости

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- артериальное кровоотечение
- обильное гноетечение
- индивидуальная непереносимость

Перед применением прочитайте инструкцию

СОСТАВ

Компонент А - 30 мл
Полимер основы «Пиррон 5003-2 630» - 24,8 мл
Вода дистиллированная - 0,6 мл
Простой полимер «Пиррон 4502» - 0,3 мл
Противогрибковый - 0,3 мл
Дезинфекант - 0,3 мл
Дезинфицирующее - 0,34 мл
Пигменты - 0,04 мл
Основа полимерная - 2,8 мл

Компонент В - 10 мл
Дифенилметилкарбонат - 10 мл

ВНИМАНИЕ!

Избегать контакта с не застывшим покрытием!
Варить от детей!
Не допускается применение в случае нарушения целостности упаковки!

ТУ 32 50-001-96660936-2018
в исполнении ОТРАН 20-1

Р/№ от _____

Для однократного применения

Условия хранения - Хранить при температуре от +5° до +40°С

Срок годности _____

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

0 000000 000000


Общий вид потребительской упаковки в виде картонной упаковки, на примере «Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии: ОтРАН 5-2»



Общий вид потребительской упаковки в виде картонной упаковки, на примере «Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии: ОТРАН 10-2»



Общий вид потребительской упаковки в виде картонной упаковки, на примере «Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии: ОтРАН 20-2»

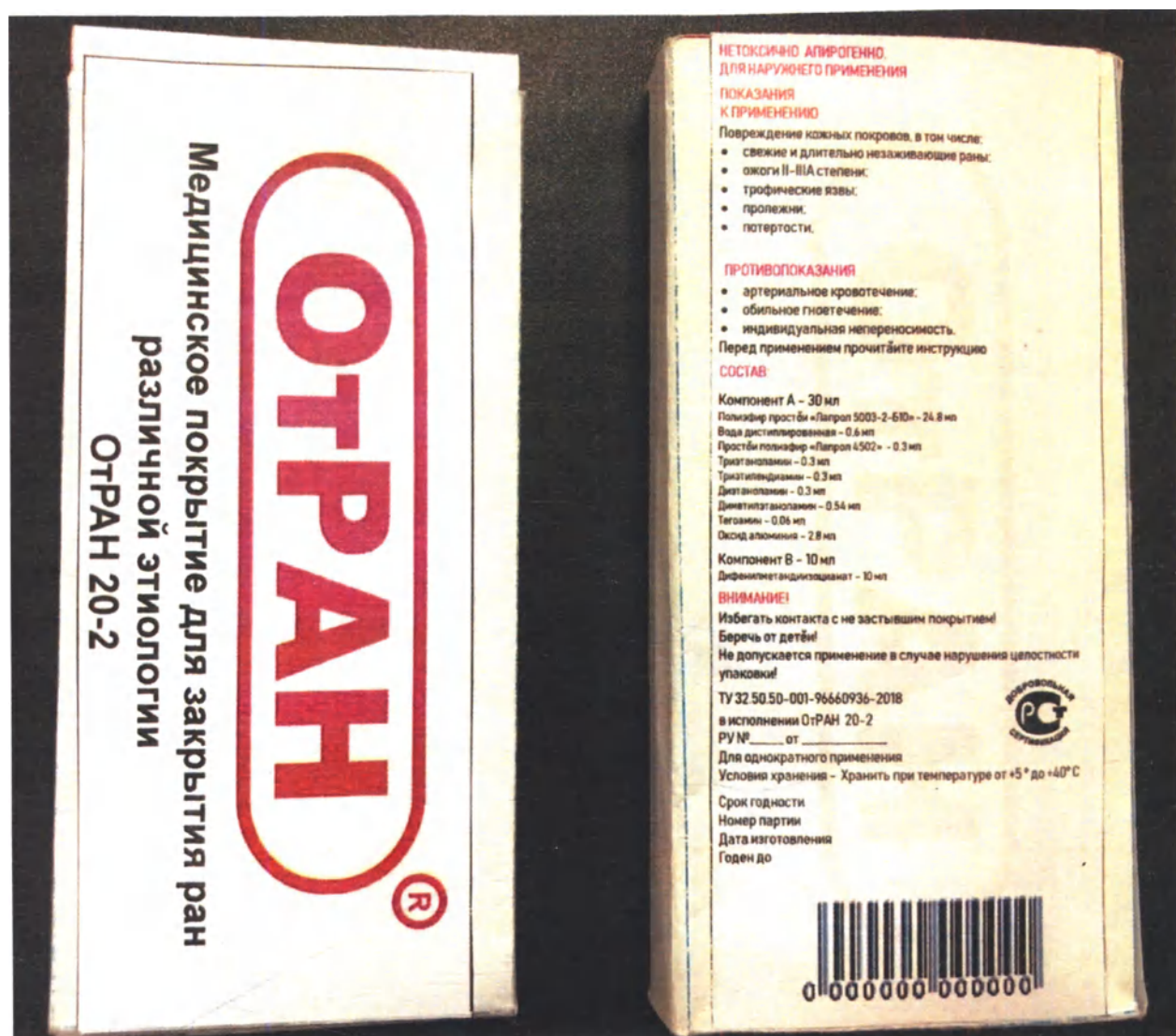

Общий вид групповой упаковки, на примере «Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии: ОтРАН 5-1»

Страна изготовитель: Россия
Предприятие-изготовитель: ООО «ПКФ «Орбита»
Юридический адрес: Россия, Рязанская область,
г. Рязань, 2-ой Мервинский проезд, д. 8.
Адрес производства: Россия, Рязанская область,
Рыбновский район, дер. Баграмово, лит. ПГ 1.
Телефон/факс: 8 800 700 44 91
Email: orbital_sekret@mail.ru
<http://pkf-orbita.ru/>

Состав:

Компонент А – 7,5 мл
Полиэфир простой «Lapron 5003-2-510» - 6,2 мл
Вода дистиллированная – 0,15 мл
Простой полиэфир «Lapron 4502» - 0,075 мл
Триэтилтопамин – 0,075 мл
Триэтилдиамин – 0,075 мл
Дистиллированный – 0,075 мл
Диметилэтанол – 0,135 мл
Тополон – 0,015 мл
Оксид алюминия – 0,7 мл
Компонент В – 2,5 мл
Дифенилметандисульфид – 2,5 мл

Беречь от детей!

Для наружного применения

Отпускается без рецепта

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Для однократного применения

РУ № _____ от _____

ОТРАН



Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии
ОтРАН по ТУ 32.50.50-001-96660936-2018
в исполнении ОтРАН 5-1

Условия хранения: Хранить при температуре от +5° до +40° С.
Количество штук
Срок годности: 3 года
Номер партии
Дата изготовления
Годен до

Общий вид транспортной упаковки, на примере «Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии: ОтРАН 5-2»

**Медицинское покрытие для закрытия ран различной этиологии
ОтРАН по ТУ 32.50.50-001-96660936-2018
в исполнении ОтРАН 5-2**

Страна изготовитель Россия
Предприятие-изготовитель ООО «ПКФ «Орбита»
Юридический адрес Россия, Рязанская область, г. Рязань, 2-ой Мервинский проезд, д. 8.
Адрес производства Россия, Рязанская область, Рыбновский район, дер. Баграмово, лит. ГГ 1.
Телефон/факс: 8 800 700 44 91
Email: orbital_sekret@mail.ru
<http://pkf-orbital.ru/>

Условия хранения: от +5°C до +40°C.

Отметка ОТК о приемке

Условия транспортирования: от +5°C до +40°C


Количество штук

Годен до

Номер партии

Дата изготовления

Масса брутто

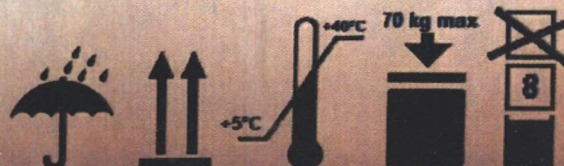

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО
15.11.2024
10.02.2025
А.И.Смирнов

