

ООО «Асцензия Диабетическая продукция»

123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная 12, офис 706

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Система для измерения уровня глюкозы в крови «Контур Плюс» («Contour Plus»)

Contour[®]
plus
Контур Плюс

ASCENSIA
Diabetes Care



Без
кодирования

Просто и точно

CE

0088

IVD

0°C - 30°C

i



1 набор

Contour[®]
plus
Контур Плюс

Система для измерения уровня глюкозы в крови

Просто и точно

- 👁️ Высокая точность результатов
- 👉 Удобство использования
- 💧 Маленькая капля крови



Работает только
с тест-полосками
Contour[®]Plus
(КОНТУР ПЛЮС)



Без
кодирования

1 набор

Прибор для измерения уровня глюкозы в крови
(«Contour Plus»)



Ланцеты Микролет (Microlet) цветные, 5 шт.




Устройство для прокалывания пальца (прокалыватель) «Микролет Некст» (Microlet Next)



Наконечник для получения капли крови из альтернативных мест



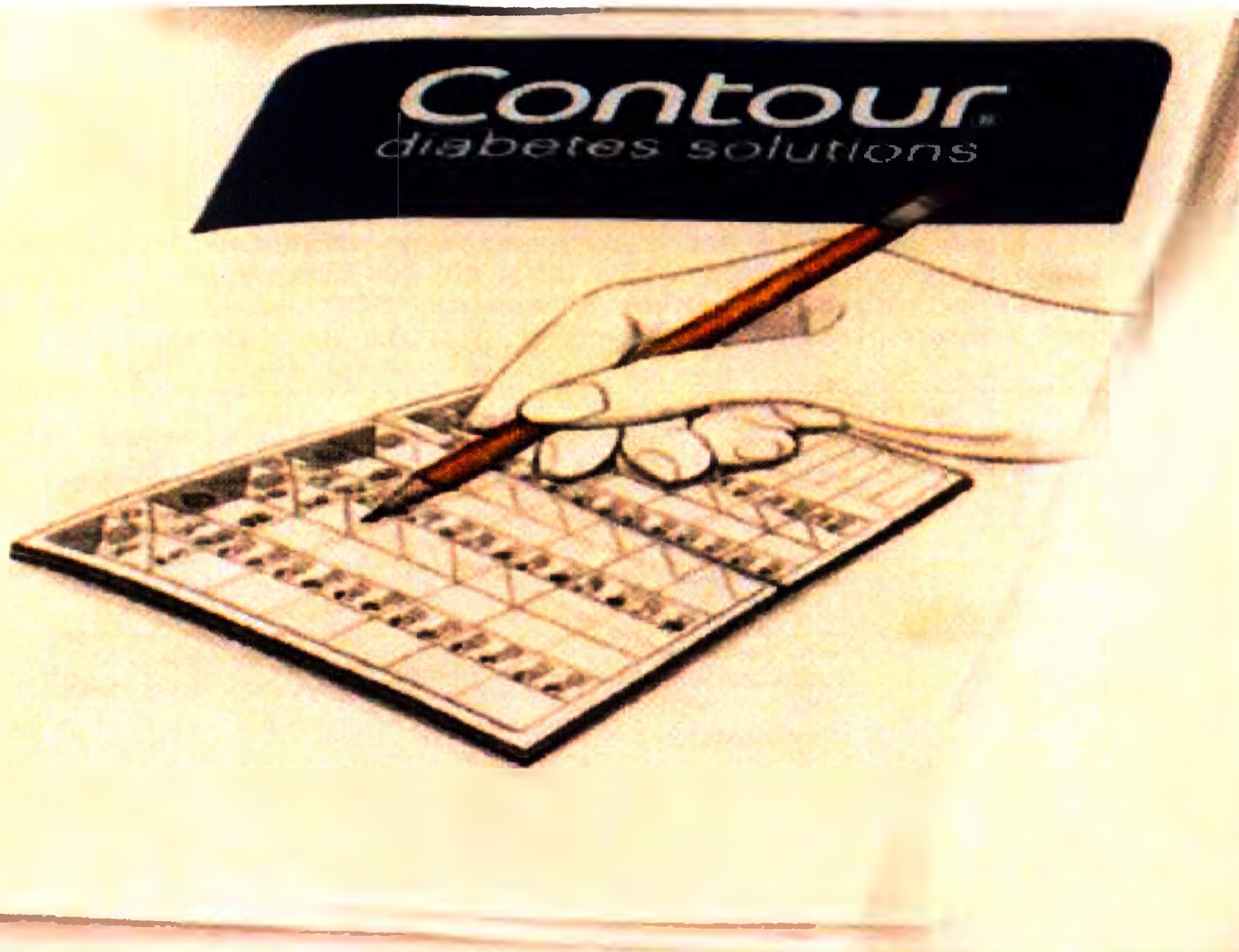

**Contour[®]
plus**

Система для измерения уровня глюкозы в крови

Контур Плюс

Пожалуйста, зарегистрируйте свой глюкометр, позвонив по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 200 44 43, либо отправив эту карту в отдел диабетической продукции ООО «Асцензия Диабетическая продукция» по адресу: Краснопресненская наб., д. 12, кор. 1, офис 706, 123610, Москва, Россия

Область/район/город _____ / _____ / _____

Дата Вашей покупки _____ / _____ / _____ (дд/мм/гг)

Серийный номер глюкометра SN _____

Пол ☐ Женский ☐ Мужской

Возраст ☐ До 10 лет ☐ 11–20 ☐ 21–50 ☐ 51–60 ☐ 61 и более

e-mail _____

Число тестов, которые Вы делаете в неделю _____

Тип диабета ☐ I тип ☐ II тип

Какой глюкометр был у Вас ранее? _____

85501437 Rev. 08/16

Contour[®] plus

КОНТУР ПЛЮС

Гликометр для измерения уровня глюкозы в крови



Без
кодирования ✓


Использовать только тест-полоски для определения
глюкозы крови Contour Plus (Контур Плюс)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Contour plus

Контур Плюс

Модель для измерения глюкозы в крови

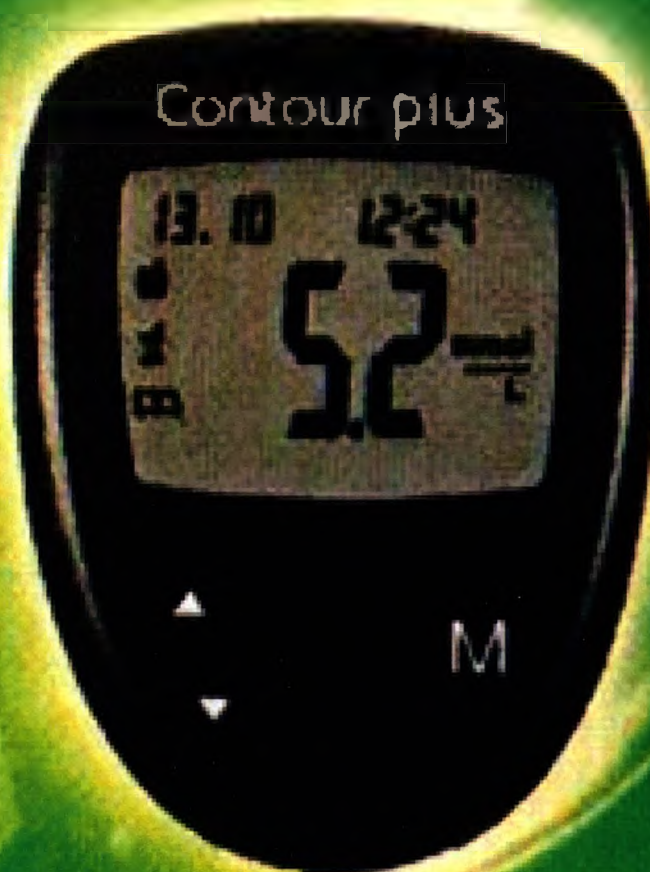

Без
игольного прокола



КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ
РУКОВОДСТВО



Ваш глюкометр CONTOUR®PLUS (Контур Плюс)



Используйте только тест-полоски CONTOUR®PLUS (Контур Плюс)

Серый конец:
Вставьте этот конец в порт для тест-полосок.
Заборный кончик тест-полоски:
с сюда вытягивается кровь.

Прочтите подробные инструкции о проведении анализа и применении устройства для прокалывания в руководстве пользователя CONTOUR®PLUS (Контур Плюс).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда тщательно мойте руки с мылом и тщательно высушивайте их до и после проведения измерения и контакта с глюкометром, прокалывателем или тест-полосками.

Внимание: Прокалыватель, входящий в ваш комплект, предназначен для индивидуального использования одним человеком. Во избежание риска заражения использование прокалывателя несколькими лицами запрещается.

Простой анализ крови из пальца

1. Снимите наконечник прокалывателя.
2. Ослабьте закругленный защитный наконечник на ланцете, повернув его на 180°, но не снимайте его.




3. С усилием вставьте ланцет в прокалыватель до упора.



4. Открутите круглый защитный колпачок ланцета.



5. Наденьте наконечник.

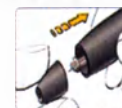

6. С помощью поворотной части наконечника отрегулируйте глубину прокола в соответствии со своими предпочтениями.



7. Вставьте серый конец в соответствующий порт для тест-полоски глюкометра. Глюкометр включится, на дисплее появится изображение тест-полоски с мигающей каплей крови. Теперь глюкометр готов к проведению измерения.



8. Прижмите прокалыватель к месту прокола и нажмите на кнопку пуска.



- С небольшим усилием проведите другой рукой по пальцу в направлении места прокола для образования капли крови.

9. Сразу прикоснитесь к капле крови заборным кончиком тест-полоски. Держите полоску в капле крови, пока глюкометр не издаст звуковой сигнал. Если одной капли крови окажется недостаточно, глюкометр издаст звуковой сигнал дважды. После этого у Вас есть около 30 секунд на то, чтобы добавить каплю крови на ту же полоску. Результат будет отображен через 5 секунд обратного отсчета.



Исследование крови из пальца

10. Чтобы выключить глюкометр, извлеките тест-полоску.



Утилизируйте тест-полоску как медицинские отходы в соответствии с инструкциями медицинского работника.

ВНИМАНИЕ.

- Прокалыватель, входящий в Ваш набор для проведения теста, не предназначен для использования медицинскими работниками. Прокалыватель не должен использоваться более чем одним человеком в связи с риском инфицирования.
- Для удаления ланцета из прокалывателя см. подробные инструкции во вкладыше к прокалывателю.
- Изображения прокалывателя приведены только для иллюстрации.

Вам нужна помощь? 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com

ARTWORK ROUTING FOR APPROVAL

SCHWAB 18211 NE 68th Street, E120 Redmond, WA 98052 T: 425-881-5454		Art Production	
DATE: September 26, 2016 CLIENT: Ascensia Diabetes Care DESCRIPTION: Contour PLUS QRG - Russian		BAN#: 85501380 Rev 08/16 Contour PLUS Quick Reference Guide - Russia Alt#1 - 09/26/16 copy changes, spec # update	
SCHWAB JOB#: 920637 SKU#: 7615 Parent Ban#84708268 DIMENSIONS: 4.0" (H) x 16.5" (W) PRINTER SPEC: 10000783886 REV -			
FONT: Helvetica Neue, Helvetica, Myriad Pro, Zapf Dingbats			
COLORS: Cyan Magenta Black 281 Process Build: 100C 79M 10Y 42K			
Clinical Trial/Global Master Template No: XXXX			
Regional Master Template No: CntrPLUS-M-ORG-0276A-R0003			
NOTE: THIS COLOR PROOF INDICATES COLOR BREAK ONLY AND MAY NOT ACCURATELY REFLECT ACTUAL PRODUCTION COLOR.			
RELEASE-V4 INTERNAL-R-X LANGUAGE(S) RUSSIAN			

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Потенциальная биологическая опасность

Считается, что все системы для измерения уровня глюкозы в крови представляют биологическую опасность.

Следует учитывать возможность передачи инфекционных заболеваний через все материалы и предметы, контактирующие с человеческой кровью, даже после их очистки.

Следует учитывать возможность передачи вирусных инфекций через всю продукцию и принадлежности, контактирующие с человеческой кровью, даже после их очистки. Пользователь должен соблюдать рекомендации для предотвращения заболеваний, передаваемых с кровью, при работе с потенциально зараженными образцами биоматериала в учреждениях здравоохранения.

Информацию о патентах и
связанных лицензиях см. по адресу:
www.patents.ascensia.com

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Все права защищены.

Ascensia, логотип Ascensia Diabetes Care, CONTOUR (Контур) и логотип «No Coding» (Без кодирования) являются торговыми знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками компании Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Асценсия Дабетис Кеа Холдингс АГ). Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Использование расширенного режима

Переключение глюкометра в расширенный режим

Чтобы переключить глюкометр в расширенный режим и использовать метки «До еды» и «После еды» и другие функции:

1. Нажмите M, чтобы включить глюкометр.
2. Нажмите ▲ или ▼ и удерживайте 3 секунды.
3. На экране замигает надпись L-2.
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы переключиться на L-2.
5. Нажмите M, чтобы подтвердить выбор.



Позвоните в Службу по работе с
клиентами по тел. 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4152 Basel, Switzerland

Асценсия Дабетис Кеа Холдингс АГ, Швейцария

После проведения тестирования и просмотра результатов используйте метки на дисплее:

Метка >	Изображение >	Настройка >	Изображение >	Ваши действия >	Использование напоминаний
До еды Указывает на то, что анализ был проведен до еды. Нажмите ▲ или ▼		Нажмите кнопку M.		К результату анализа будет добавлена метка «До еды». Нажмите M еще раз, чтобы включить напоминание о повторном анализе после еды.	 Когда звучит напоминание, глюкометр включается, а на экране отображается результат теста до еды.
После еды Указывает на то, что анализ был проведен после еды. Нажмите ▲ или ▼		Нажмите кнопку M.		К результату анализа будет добавлена метка «После еды».	
Дневник Указывает на то, что результат уникален или чем-то отличается от остальных. Нажмите ▲ или ▼		Нажмите кнопку M.		Результат будет помечен в памяти как уникальный. Отметьте это в дневнике.	

Включение напоминания (по умолчанию – через 2 часа) о повторном анализе после еды. Подробная инструкция об использовании меток и включении напоминаний в разное время содержится в руководстве пользователя.

Коды и символы ошибок

Полный список приведен в руководстве пользователя.

E1		Температура за пределами допустимого диапазона.
E2		Заполнить тест-полоску не удалось. Повторите тест с новой тест-полоской.
E3		Глюкометр определил, что тест-полоска уже использовалась, или контрольный раствор не отвечает требованиям. Повторите тест с новой тест-полоской.
E11		Результат за пределами нормы. Повторите тест с новой тест-полоской.

Импортер на территории России:
ООО «Асценсия Дабетическая продукция»
Крылатовский наб., д. 12, кп. 1, офис 706,
123610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43

ASCENSIA
Diabetes Care

Регистрационное Удостоверение №
123610. Москва, Россия

85501380
Rev. 08/16



ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
«13» () ЧИСТА/ОВ
(тринадцатое)