

ООО «Вектор Плюс Текстиль»
141112, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77,
литера 1, объект 2, пом. 5,6,7,13
ИНН 5050038915, ОГРН 1035010202809

УТВЕРЖДАЮ



Директор
ООО «Вектор Плюс
Текстиль»

—И.А. Анисимова

« 13 -го » марта 20 14 г.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ
по ТУ 14.12.30-001-56899225-2017

Щелково
2017г

**Руководство по применению/паспорт изделия
ХАЛАТ ОПЕРАЦИОННЫЙ**

Внешний вид и конструкция моделей представлены на рисунке 1:

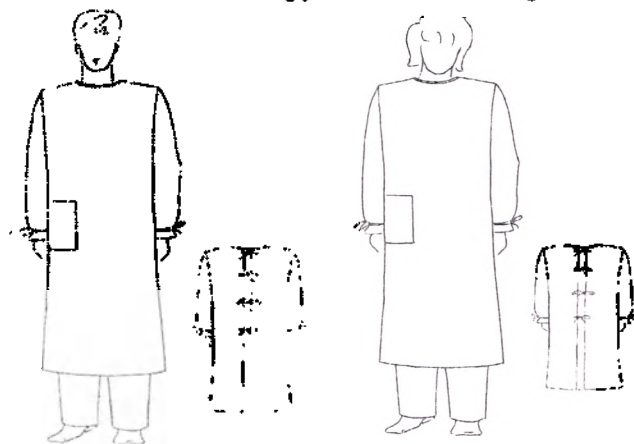


Рисунок 1. Халат операционный (унисекс) ХО-6

Назначение: Халат операционный предназначен для использования медицинским персоналом во время хирургических процедур с целью защиты как пациента, так и персонала операционной от переноса микроорганизмов, жидкостей тела и частиц жидкости в воздухе. Применяют многократно после дезинфекции и стирки.

Показания к применению медицинского изделия: «Одежда медицинская по ТУ 14.12.30-001-56899225-2017», производства ООО «Вектор Плюс Текстиль»: использовать изделие в соответствии с его назначением.

Противопоказание: изделия не имеют медицинских противопоказаний к применению.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют.

Описание: Халат операционный - универсальный предмет одежды для мужчин/женщин (унисекс), изготовленный из натуральных и синтетических материалов или их сочетаний, - представляет собой халат прямого силуэта, с завязками на спинке, с нижним накладным карманом на полочке, без воротника, с округлым вырезом горловины, с окантовкой по линии горловины. Рукава втачные, длинные, с завязками на запястье (рис. 1).

Во внешний вид халатов операционных допускается вносить изменения, не меняющие их назначение, а именно изготавливать:

- с карманами различных видов, размеров и местом расположения или без них;
- с различными видами регулировок по спинке и низу рукавов или без них;
- с рукавами различной конструкции, с манжетами или без них;
- без боковых швов.

Материал:

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Тиси, 35% хлопок, 65% пэ, пл.110-130г/м²

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Медея, 35% хлопок, 65% пэ, пл.170-190г/м²

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Бостон, 35% хлопок, 65% пэ, пл.210-230г/м²

Порядок применения: Изделие нестерильное. Перед первым использованием обязательно постирать. При необходимости – простерилизовать.

Измерения готовых изделий должны соответствовать таблице 1 и рисунку 2.

Таблица 1. Таблица измерений халата операционного (унисекс)

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см	Ширина рукава внизу (К), см
40-46	110,0±10,0	60,0±5,0	62,0±5,0	18,0±2,0
48-54	130,0±10,0	68,0±5,0		
56-62	150,0±10,0	76,0±5,0		
64-70		84,0±5,0		

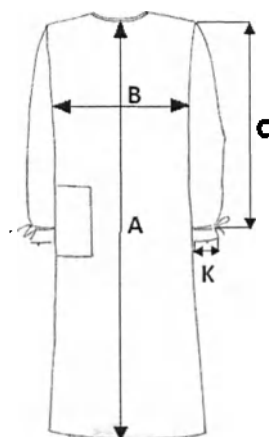


Рисунок 2 – Халат операционный (унисекс) ХО-6

Требования к дезинфекции: При работе с медицинской одеждой руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II группы патогенности (опасности)", СанПиН 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV группы патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Стирка и дезинфекция белья, в т.ч. загрязненного кровью и другими биологическими субстратами, осуществляется ручным и механизированным способом при строгом соблюдении требований МУ 3.5.736-99 "Технология обработки белья в медицинских учреждениях".

Изделия должны быть устойчивы к обработке и выдерживать не менее 60 циклов стирки и дезинфекции при соблюдении рекомендованных режимов:

1) замачивание в 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ого раствора моющего средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья) в течение 60мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

2) замачивание и стирка в растворе дезинфицирующего средства (ДС) "ГЛАВСТИРКА": белье замачивают в 2%-ном рабочем растворе средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья), начальная температура раствора 60°C (в процессе дезинфекции не поддерживается), время замачивания 30мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

-при совмещении режимов дезинфекции и стирки белья механизированным способом использовать 2%-ный раствор средства, температура стирки 60°C, время стирки 30мин. (без учета времени полоскания и отжима).

Изделия должны быть устойчивы к автоклавированию и выдерживать не менее 10 циклов обеззараживания в паровом стерилизаторе при режиме: 132°C в течение 60 мин.

Цветное и белое белье обрабатывать отдельно.

Рекомендации по уходу: Остатки ДС и общие загрязнения удаляются общепринятыми способами, рекомендации по уходу за изделиями из текстильных материалов представлены в таблице 2. Механические воздействия, сильно уменьшенные. Полоскание обычное. Отжим ослабленный. Не выжимать руками.

Таблица 2 - Рекомендации по уходу

Наименование изделия	Способы ухода				
	Стирка	Отбеливание	Сушка	Глажение	Химическая чистка
Халаты операционные	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре (40-60)°С с последующим полосканием и отжимом	Отбеливание только кислородосодержащим/хлорным веществом	Сушку производить после отжима в вертикально подвешенном положении, не применять сушку в барабане	Гладить при температуре не выше 150°С, с запариванием	Профессиональная сухая чистка обычными реагентами (перхлорэтилен, гидрокарбонат, тетрахлорэтилен, бензин, уайт-спирит и трифтортрихлорэтан (фреон))

Примечание: Отбеливание применять только для изделий из тканей белого цвета.

Условия хранения: Изделия хранят в сухих закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 25 °С и относительной влажности 50-80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды, агрессивных сред, прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты производства.

Условия транспортировки: Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Текущий ремонт: В процессе эксплуатации текущий ремонт производится по мере необходимости силами потребителя.

Утилизация: Изделия утилизируют в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам - ТБО).

Комплект поставки:

Халат, шт	1;
Образцы ткани и запасная фурнитура, комплект	1;
Руководство по применению (Паспорт изделия), шт	1;
Упаковка (полиэтиленовый пакет), шт	1.

Гарантия изготовителя: Предприятие-изготовитель ООО «Вектор Плюс Текстиль» гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Претензии по качеству в течение гарантийного срока направлять по адресу: 141112, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77, литера 1, объект 2, пом. 5,6,7,13.

Контактные телефоны: 8 (49656) 7-01-41, 8 (495) 740-47-79.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня реализации.

Ир-во Россия

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

**Руководство по применению/паспорт изделия
ХАЛАТЫ МЕДИЦИНСКИЕ**

Внешний вид и конструкция моделей представлены на рисунках 1, 2 и в Приложении 1:



Рисунок 1. Халат медицинский мужской
ХМ-3 Классика, укороченный



Рисунок 2. Халат медицинский женский
ХМ-12 Классика

Назначение: Халат медицинский предназначен для использования медицинским персоналом, иногда поверх костюма медицинского работника, во время обследования пациентов и различных процедур с целью предохранения как пациента, так и врача, от переноса, например, микроорганизмов или жидкостей тела. Применяют многократно после дезинфекции и стирки.

Показания к применению медицинского изделия: «Одежда медицинская по ТУ 14.12.30-001-56899225-2017», производства ООО «Вектор Плюс Текстиль»: использовать изделие в соответствии с его назначением.

Противопоказание: изделия не имеют медицинских противопоказаний к применению.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют.

Описание: Халаты медицинские подразделяют на мужские и женские и представляют собой халаты с бортовой застежкой, с английским воротником, с накладными карманами и обтачками на полочках. Спинка цельнокроеная или из двух частей со швом посередине, с хлястиком на уровне талии спинки для мужского халата и с поясами-завязками на уровне талии спинки, для женского. Рукава втачные, длинные/короткие.

Халат медицинский мужской – халат прямого силуэта.

Халат медицинский женский – халат полуприлегающего силуэта.

Во внешний вид халатов допускается вносить изменения, не меняющие их назначение, а именно:

- с воротниками различной формы и конструкции или без воротника;
- с круглым, V-образным и фигурным вырезом горловины;
- с кокетками различной формы и размеров на спинке и полочках;
- с различными рельефами и отделочными строчками или без них;
- с различными складками на спинке и полочках;
- с отделками или без них;
- с различными видами застежек или без них;
- со сменной и ассиметричной бортовой застежкой;
- с различным количеством петель;
- с карманами различных видов, размеров и местом расположения или без них;
- с рукавами различной длины и конструкции, с манжетами или без них;
- с прокладками в воротнике, лацканах и манжетах рукавов;
- с различными видами регулировок по низу изделий, рукавов и линии талии;

- с поясом, хлястиком, с эластичной тесьмой, лентой на уровне талии или без них;
- с вытачками на линии талии или без них;
- с прорезями в боковых швах или без них;
- без боковых швов;
- со плищами или разрезами в среднем шве спинки, боковых швах и рельефах;
- из цветных тканей, с отделками и деталями из тканей контрастного цвета.

Материал:

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Тиси, 35% хлопок, 65% пэ, пл.110-130г/м2

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Медея, 35% хлопок, 65% пэ, пл.170-190г/м2

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Бостон, 35% хлопок, 65% пэ, пл.210-230г/м2

Порядок применения: Изделие нестерильное. Перед первым использованием обязательно постирать. При необходимости – простерилизовать.

Измерения готовых изделий должны соответствовать таблице 1,2 и рисункам 3,4

Таблица 1. Таблица измерений халата медицинского мужского

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см		Ширина рукава внизу (К), см	
			длинного	короткого	длинного	короткого
40-46	110,0±10,0	60,0±5,0	62,0±5,0	31±5,0	18,0±2,0	21,±2,0
48-54	130,0±10,0	68,0±5,0				
56-62	150,0±10,0	76,0±5,0				
64-70		84,0±5,0				

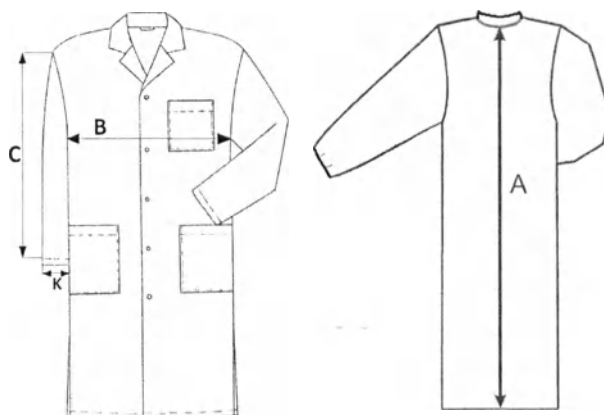


Рисунок 3 – Халат медицинский мужской

Таблица 2. Таблица измерений халата медицинского женского

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см		Ширина рукава внизу (К), см	
			длинного	короткого	длинного	короткого
40-46	94,0±10,0	55,0±5,0	58,0±5,0	26±5,0	16,0±2,0	20,±2,0
48-54	110,0±10,0	63,0±5,0				
56-62	118,0±10,0	69,0±5,0				
64-70		76,0±5,0				

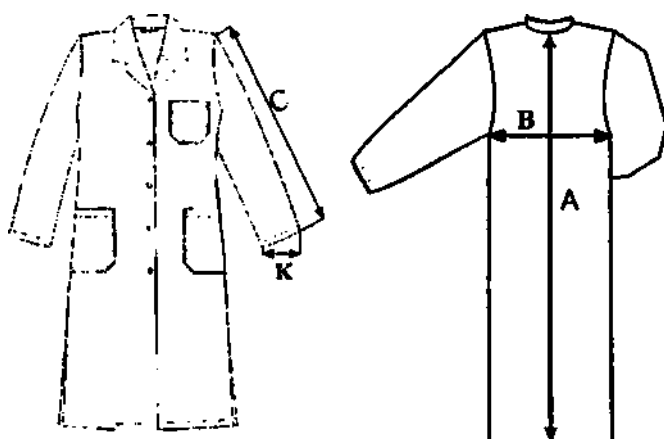


Рисунок 4 – Халат медицинский женский

Требования к дезинфекции: При работе с медицинской одеждой руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 1.3.3.118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", СанПиН 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Стирка и дезинфекция белья, в т.ч. загрязненного кровью и другими биологическими субстратами, осуществляется ручным и механизированным способом при строгом соблюдении требований МУ 3.5.736-99 "Технология обработки белья в медицинских учреждениях".

Изделия должны быть устойчивы к обработке и выдерживать не менее 60 циклов стирки и дезинфекции при соблюдении рекомендованных режимов:

1) замачивание в 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ого раствора моющего средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья) в течение 60мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

2) замачивание и стирка в растворе дезинфицирующего средства (ДС) "ГЛАВСТИРКА": белье замачивают в 2%-ном рабочем растворе средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья), начальная температура раствора 60°C (в процессе дезинфекции не поддерживается), время замачивания 30мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

при совмещении режимов дезинфекции и стирки белья механизированным способом использовать 2%-ный раствор средства, температура стирки 60°C, время стирки 30мин. (без учета времени полоскания и отжима).

Изделия должны быть устойчивы к автоклавированию и выдерживать не менее 10 циклов обеззараживания в паровом стерилизаторе при режиме: 132°C в течение 60 мин.

Цветное и белое белье обрабатывать отдельно.

Рекомендации по уходу: Остатки ДС и общие загрязнения удаляются общепринятыми способами, рекомендации по уходу за изделиями из текстильных материалов представлены в таблице 3. Механические воздействия, сильно уменьшенные. Полоскание обычное. Отжим ослабленный. Не выжимать руками.

Таблица 3 - Рекомендации по уходу

Наименование изделия	Способы ухода				
	Стирка	Отбеливание	Сушка	Глажение	Химическая чистка
Халаты медицинские многоразового использования	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре (40-60)°C с последующим полосканием и отжимом	Отбеливание только кислородосодержащим/нехлорным веществом	Сушку производить после отжима в вертикально подвешенном положении, не применяя сушку в барабане	Гладить при температуре не выше 150°C, с запариванием	Профессиональная сухая чистка обычными реагентами (перхлорэтилен, гидрокарбонат, тетрахлорэтилен, бензин, уайт-спирит и трифтортрихлорэтан (фреон))

Примечание: Отбеливание применять только для изделий из тканей белого цвета.

Условия хранения: Изделия хранят в сухих закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5°С до плюс 25 °С и относительной влажности (50-80) %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды, агрессивных сред, прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты производства.

Условия транспортировки: Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Текущий ремонт: В процессе эксплуатации текущий ремонт производится по мере необходимости силами потребителя.

Утилизация: Изделия утилизируют в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам - ТБО).

Комплект поставки:

Халат, шт	1;
Образцы ткани и запасная фурнитура, комплект	1;
Руководство по применению (Паспорт изделия), шт	1;
Упаковка (полиэтиленовый пакет), шт	1.

Гарантия изготовителя: Предприятие–изготовитель ООО «Вектор Плюс Текстиль» гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Претензии по качеству в течение гарантийного срока направлять по адресу: 141112, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77, литера 1, объект 2, пом. 5,6,7,13.

Контактные телефоны: 8 (49656) 7-01-41, 8 (495) 740-47-79.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня реализации.

Пр-во Россия

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

Модели и артикулы изделия
ХАЛАТЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Халат медицинский (мужской):

Халат прямого силуэта, на пуговицах/кнопках



XM-3 Классика укороченный

Халаты медицинские (женские):

Халаты прямого силуэта, на молнии




XM-15 Стелла




XM-177a Эффект+


Халаты прямого силуэта, на пуговицах/кнопках

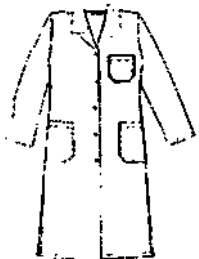

XM-3a Форма

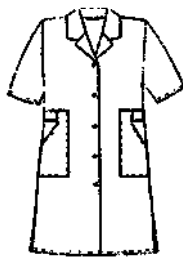

XM-38 Практик

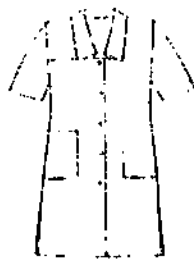

XM-40 Модерн

Халаты полуприлегающего силуэта, на пуговицах/кнопках



XM-26 Бетта




XM-13 Соло




XM-21 Люкс



XM-22 Лилия

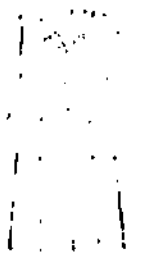

XM-44 Лидия

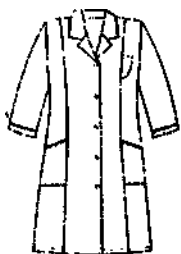

XM-23 Ирис



XM-94 Вероника



XM-155 Стиль



XM-12 Классика

Руководство по применению/паспорт изделия
КОСТЮМЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Внешний вид и конструкция моделей представлены на рисунках 1, 2 и в Приложении 1:



Рисунок 1. Костюм хирургический
КХ-2а куртка (мужская)
Бр-1 Брюки прямые на резинке

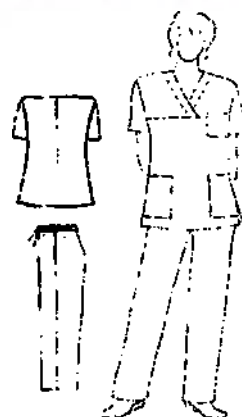


Рисунок 2. Костюм хирургический
КХ-2б куртка (женская)
Бр-1 Брюки прямые на резинке

Назначение: Костюм хирургический, в виде комплекта спецодежды - куртки и брюк, предназначен для защиты хирурга, больных и медицинского персонала от возбудителей инфекционных заболеваний, а также для ношения поверх верхней одежды для защиты помещений (больницы, стационары и т.д.) от влаги, грязи и пыли. Применяют многократно после дезинфекции и стирки.

Показания к применению медицинского изделия: «Одежда медицинская по ТУ 14.12.30-001-56899225-2017», производства ООО «Вектор Плюс Текстиль»: использовать изделие в соответствии с его назначением.

Противопоказание: изделия не имеют медицинских противопоказаний к применению.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют.

Описание: Костюм хирургический представляет собой комплект спецодежды, изготовленный из натуральных и синтетических материалов или их сочетаний, состоящий из куртки и брюк на резинке или на кулиске. Допускается изготовление изделий отдельными предметами. Костюмы хирургические подразделяют на мужские (рис. 1) и женские (рис. 2), см. Приложение 1.

Во внешний вид хирургических костюмов допускается вносить изменения, не меняющие их назначение, а именно: изготавливать модели со следующими характеристиками:

- с воротниками различной формы и конструкции или без воротника;
- с круглым, V-образным и фигурным вырезом горловины;
- с кокетками различной формы и размеров на спинке и полочках;
- с различными рельефами и отделочными строчками или без них;
- с различными складками на спинке и полочках;
- с отделками или без них;
- с различными видами застежек или без них;
- со смещенной и ассиметричной бортовой застежкой;
- с различным количеством петель;
- с карманами различных видов, размеров и местом расположения или без них;
- с рукавами различной длины и конструкции, с манжетами или без них;
- с прокладками в воротнике, лацканах и манжетах рукавов;

- с различными видами регулировок по низу изделий, рукавов и линии талии;
- с поясом, хлястиком, с эластичной тесьмой, лентой на уровне талии или без них;
- с вытачками на линии талии или без них;
- с прорезями в боковых швах или без них;
- без боковых швов;
- со шлицами или разрезами в среднем шве спинки, боковых швах и рельефах;
- из цветных тканей или с деталями из тканей контрастного цвета;
- с юбкой (для женских костюмов);
- с брюками различной формы и длины, со шлицами, манжетами и ластовицами, на кулиске, с различными видами застежек на поясе, с карманами или без них.

Материал:

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Тиси, 35% хлопок, 65% пэ, пл.110-130г/м2
Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Медея, 35% хлопок, 65% пэ, пл.170-190г/м2
Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Бостон, 35% хлопок, 65% пэ, пл.210-230г/м2

Порядок применения: Изделие нестерильное. Перед первым использованием обязательно постирать. При необходимости – простерилизовать.

Измерения готовых изделий должны соответствовать таблицам 1-4 и рисункам 3-6.

Таблица 1. Таблица измерений куртки от костюма мужской

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см		Ширина рукава (D), см		Ширина рукава снизу на манжете/резинке (К)
			длинного	короткого	длинного	короткого	длинного
40-46	80,0±5,0	60,0±5,0	62,0±5,0	30,0±3,0	30,0±10,0	40,0±10,0	8,5±1,0
48-54		68,0±5,0					
56-62		76,0±5,0					
64-70		84,0±5,0					

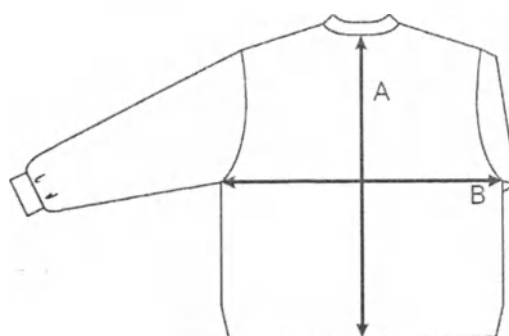
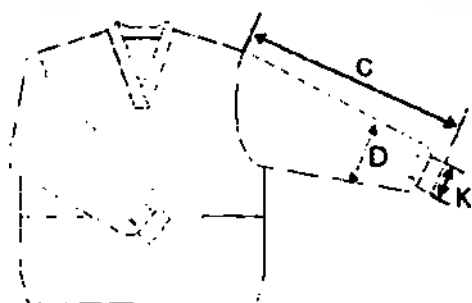


Рисунок 3 – Куртка костюма мужская

Таблица 2. Таблица измерений брюк от костюма мужских

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина брюк внизу (Н), см	Длина завязок (К) (при наличии), см
40-46	110,0±10,0	50,0±5,0	85,0±5,0	30,0±3,0	20,0±10,0
48-54		58,0±5,0			
56-62		66,0±5,0			
64-70		74,0±5,0			

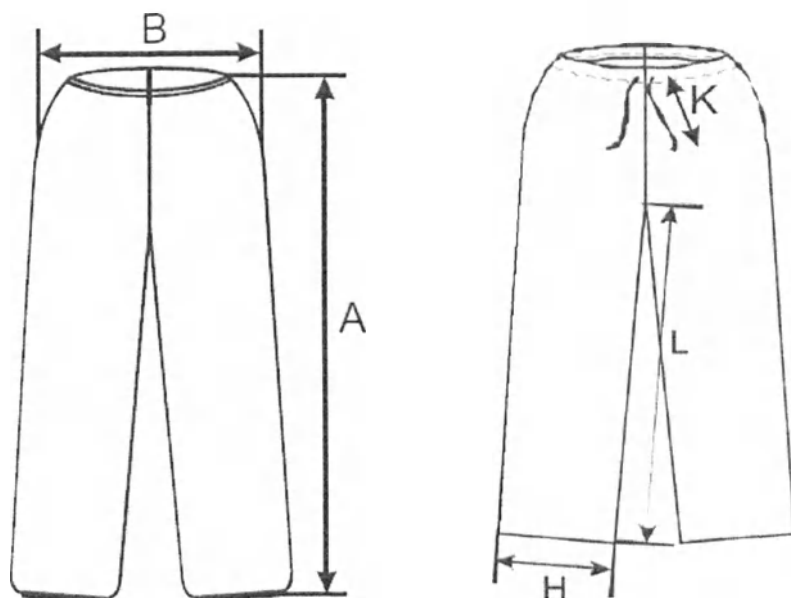


Рисунок 4 – Брюки от костюма мужские

Таблица 3. Таблица измерений куртки от костюма женской

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см		Ширина рукава (D), см		Ширина рукава снизу на манжете/резинке (К)
			длинного	короткого	длинного	короткого	длинного
40-46	70,0±5,0	55,0±5,0	58,0±5,0	26,0±3,0	26,0±10,0	36,0±10,0	7,5±1,0
48-54		63,0±5,0					
56-62		69,0±5,0					
64-70		76,0±5,0					

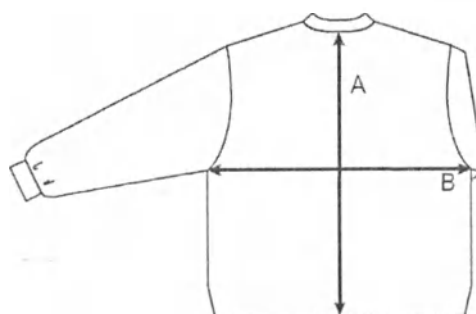
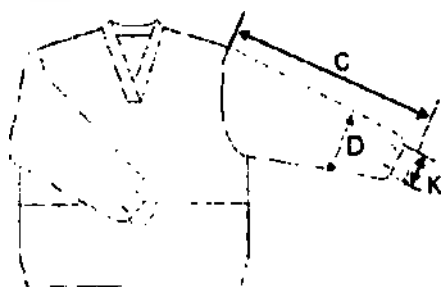


Рисунок 5 – Куртка костюма женская

Таблица 4. Таблица измерений брюк от костюма женских

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина брюк внизу (Н), см	Длина завязок (К) (при наличии), см
40-46	96,0±10,0	45,0±5,0	75,0±5,0	20,0±3,0	20,0±10,0
48-54		53,0±5,0			
56-62		59,0±5,0			
64-70		66,0±5,0			

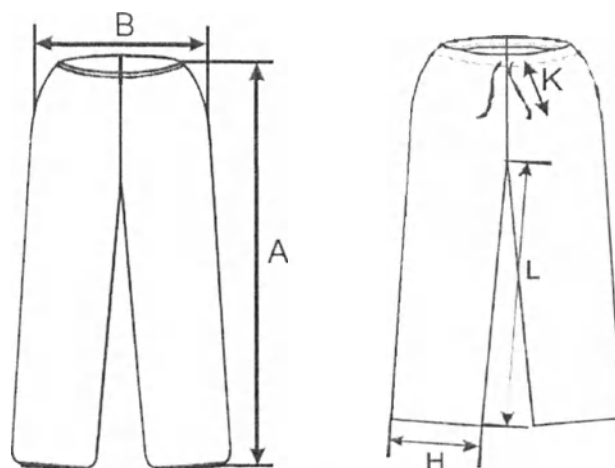


Рисунок 6 – Брюки от костюма женские

Требования к дезинфекции: При работе с медицинской одеждой руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", СанПиН 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Стирка и дезинфекция белья, в т.ч. загрязненного кровью и другими биологическими субстратами, осуществляется ручным и механизированным способом при строгом соблюдении требований МУ 3.5.736-99 "Технология обработки белья в медицинских учреждениях".

Изделия должны быть устойчивы к обработке и выдерживать не менее 60 циклов стирки и дезинфекции при соблюдении рекомендованных режимов:

- 1) замачивание в 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ого раствора моющего средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья) в течение 60мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;
- 2) замачивание и стирка в растворе дезинфицирующие средства (ДС) "ГЛАВСТИРКА": белье замачивают в 2%-ном рабочем растворе средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья), начальная температура раствора 60°C (в процессе дезинфекции не поддерживается), время замачивания 30мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

-при совмещении режимов дезинфекции и стирки белья механизированным способом использовать 2%-ный раствор средства, температура стирки 60°C, время стирки 30мин. (без учета времени полоскания и отжима).

Изделия должны быть устойчивы к автоклавированию и выдерживать не менее 10 циклов обеззараживания в паровом стерилизаторе при режиме: 132°C в течение 60 мин.

Цветное и белое белье обрабатывать отдельно.

Рекомендации по уходу: Остатки ДС и общие загрязнения удаляются общепринятыми способами, рекомендации по уходу за изделиями из текстильных материалов представлены в таблице 5. Механические воздействия, сильно уменьшенные. Полоскание обычное. Отжим ослабленный. Не выжимать руками.

Таблица 5 - Рекомендации по уходу

Наименование изделия	Способы ухода				
	Стирка	Отбеливание	Сушка	Глажение	Химическая чистка
Костюмы хирургические многоразового использования	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре (40-60)°C с последующим полосканием и отжимом	Отбеливание только кислородосодержащим/нехлорным веществом	Сушку производить после отжима в вертикальном положении, не применять сушку в барабане	Гладить при температуре не выше 150°C, с запариванием	Профессиональная сухая чистка обычными реагентами (перхлорэтилен, гидрокарбонат, тетракарбонэтилен, бензин, уайт-спирит и трифтортрихлорэтан (фреон))

Примечание: Отбеливание применять только для изделий из тканей белого цвета.

Условия хранения: Изделия хранят в сухих закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5°С до плюс 25 °С и относительной влажности (50-80) %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды, агрессивных сред, прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты производства.

Условия транспортировки: Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Текущий ремонт: В процессе эксплуатации текущий ремонт производится по мере необходимости силами потребителя.

Утилизация: Изделия утилизируют в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам - ТБО).

Комплект поставки:

Куртка, шт	1;
Брюки, шт	1
Образцы ткани и запасная фурнитура, комплект	1;
Руководство по применению (Паспорт изделия), шт	1;
Упаковка (полиэтиленовый пакет), шт	1.

Гарантия изготовителя: Предприятие-изготовитель ООО «Вектор Плюс Текстиль» гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Претензии по качеству в течение гарантийного срока направлять по адресу: 141112, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77, литера 1, объект 2, пом. 5,6,7,13.

Контактные телефоны: 8 (49656) 7-01-41, 8 (495) 740-47-79.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня реализации.

Пр-во Россия

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

Модели и артикулы изделия
КОСТЮМЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Куртка от костюма (мужская):

Куртка прямого силуэта, без застежки



КХ-2а

Куртка от костюма женская:

Куртка прямого силуэта, без застежки



КХ-2б


Брюки от костюма хирургические:



Брюки прямые на резинке
Бр-1 мужские/женские



Брюки прямые на кулиске
Бр-2 мужские/женские

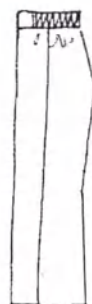

Брюки женские на резинке
Бр-3 женские

ООО «Вектор Плюс Текстиль»
141112, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77,
литера 1, объект 2, пом. 5,6,7,13
ИНН 5050038915, ОГРН 1035010202809

Руководство по применению/паспорт изделия
КОСТЮМЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Внешний вид и конструкция моделей представлены на рисунках 1 и в Приложении 1:



Рисунок 1. Костюм медицинский
К-1в Дентал куртка (женская)
Br-1 Брюки прямые на резинке

Назначение: Костюм медицинский, в виде комплекта спецодежды - куртки и брюк, предназначен для использования медицинским персоналом во время различных процедур, в том числе осмотре пациентов, с целью предохранения как пациента, так и врача, от переноса микроорганизмов или жидкостей тела, частиц жидкости в воздухе. Применяют многократно после дезинфекции и стирки.

Показания к применению медицинского изделия: «Одежда медицинская по ТУ 14.12.30-001-56899225-2017», производства ООО «Вектор Плюс Текстиль»: использовать изделие в соответствии с его назначением.

Противопоказание: изделия не имеют медицинских противопоказаний к применению.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют.

Описание: Костюм медицинский представляет собой комплект спецодежды, изготовленный из натуральных и синтетических материалов или их сочетаний, состоящий из куртки и брюк на резинке или на кулиске. Допускается изготовление изделий отдельными предметами. Костюмы медицинские женские выполняются в вариантах исполнения см. Приложение 1.

Во внешний вид медицинских костюмов допускается вносить изменения, не меняющие их назначение, а именно: изготавливать модели со следующими характеристиками:

- с воротниками различной формы и конструкции или без воротника;
- с круглым, V-образным и фигурным вырезом горловины;
- с кокетками различной формы и размеров на спинке и полочках;
- с различными рельефами и отделочными строчками или без них;
- с различными складками на спинке и полочках;
- с отделками или без них;

- с различными видами застежек или без них;
- со смещенной и ассиметричной бортовой застежкой;
- с различным количеством петель;
- с карманами различных видов, размеров и местом расположения или без них;
- с рукавами различной длины и конструкции, с манжетами или без них;
- с прокладками в воротнике, лацканах и манжетах рукавов;
- с различными видами регулировок по низу изделий, рукавов и линии талии;
- с поясом, хлястиком, с эластичной тесьмой, лентой на уровне талии или без них;
- с вытачками на линии талии или без них;
- с прорезями в боковых швах или без них;
- без боковых швов;
- со шлицами или разрезами в среднем шве спинки, боковых швах и рельефах;
- из цветных тканей или с деталями из тканей контрастного цвета;
- с юбкой (для женских костюмов);
- с брюками различной формы и длины, со шлицами, манжетами и ластовицами, на кулиске, с различными видами застежек на поясе, с карманами или без них.

Материал:

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Тиси, 35% хлопок, 65% пэ, пл.110-130г/м2

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Медея, 35% хлопок, 65% пэ, пл.170-190г/м2

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Бостон, 35% хлопок, 65% пэ, пл.210-230г/м2

Порядок применения: Изделие нестерильное. Перед первым использованием обязательно постирать. При необходимости – простерилизовать.

Измерения готовых изделий должны соответствовать таблицам 1, 2 и рисункам 2,3.

Таблица 1. Таблица измерений куртки от костюма женской

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см		Ширина рукава (D), см		Ширина рукава снизу на манжете/резинке (К)
			длинного	короткого	длинного	короткого	длинного
40-46	70,0±5,0	55,0±5,0	58,0±5,0	26,0±3,0	26,0±10,0	36,0±10,0	7,5±1,0
48-54		63,0±5,0					
56-62		69,0±5,0					
64-70		76,0±5,0					

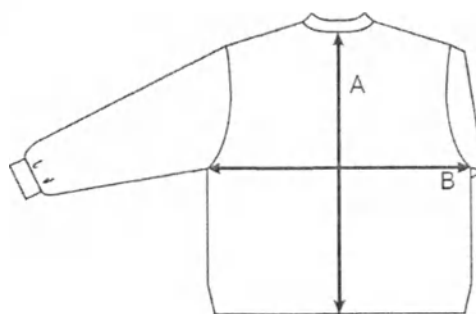
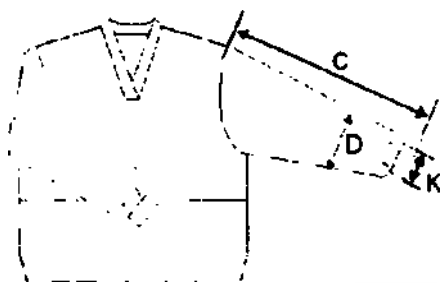


Рисунок 2 – Куртка костюма женская

Таблица 2. Таблица измерений брюк от костюма женских

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина брюк внизу (Н), см	Длина завязок (К) (при наличии), см
40-46	96,0±10,0	45,0±5,0	75,0±5,0	20,0±3,0	20,0±10,0
48-54		53,0±5,0			
56-62		59,0±5,0			
64-70		66,0±5,0			

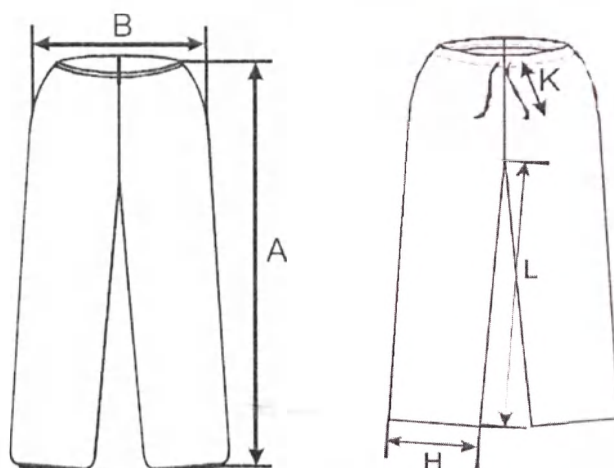


Рисунок 3. Брюки от костюма женские

Требования к дезинфекции: При работе с медицинской одеждой руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", СанПиН 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Стирка и дезинфекция белья, в т.ч. загрязненного кровью и другими биологическими субстратами, осуществляется ручным и механизированным способом при строгом соблюдении требований МУ 3.5.736-99 "Технология обработки белья в медицинских учреждениях".

Изделия должны быть устойчивы к обработке и выдерживать не менее 60 циклов стирки и дезинфекции при соблюдении рекомендованных режимов:

1) замачивание в 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ого раствора моющего средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья) в течение 60мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

2) замачивание и стирка в растворе дезинфицирующие средства (ДС) "ГЛАВСТИРКА": белье замачивают в 2%-ном рабочем растворе средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья), начальная температура раствора 60°C (в процессе дезинфекции не поддерживается), время замачивания 30мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

-при совмещении режимов дезинфекции и стирки белья механизированным способом использовать 2%-ный раствор средства, температура стирки 60°C, время стирки 30мин. (без учета времени полоскания и отжима).

Изделия должны быть устойчивы к автоклавированию и выдерживать не менее 10 циклов обеззараживания в паровом стерилизаторе при режиме: 132°C в течение 60 мин.

Цветное и белое белье обрабатывать отдельно.

Рекомендации по уходу: Остатки ДС и общие загрязнения удаляются общепринятыми способами, рекомендации по уходу за изделиями из текстильных материалов представлены в таблице 3. Механические воздействия, сильно уменьшенные. Полоскание обычное. Отжим ослабленный. Не выжимать руками.

Таблица 3. Рекомендации по уходу

Наименование изделия	Способы ухода				
	Стирка	Отбеливание	Сушка	Глажение	Химическая чистка
Костюмы медицинские многоразового использования	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре (40-60)°С с последующим полосканием и отжимом	Отбеливание только кислородосодержащим/нехлорным веществом	Сушку производить после отжима в вертикально подвешенном положении, не применять сушку в барабане	Гладить при температуре не выше 150°С, с запариванием	Профессиональная сухая чистка обычными реагентами (перхлорэтилен, гидрокарбонат, тетракарбонат, бензин, уайт-спирит и трифтортрихлорэтан (фреон))

Примечание: Отбеливание применять только для изделий из тканей белого цвета.

Условия хранения: Изделия хранят в сухих закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5°С до плюс 25 °С и относительной влажности (50-80) %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды, агрессивных сред, прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты производства.

Условия транспортировки: Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Текущий ремонт: В процессе эксплуатации текущий ремонт производится по мере необходимости силами потребителя.

Утилизация: Изделия утилизируют в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам - ТБО).

Комплект поставки:

Куртка, шт 1;
 Брюки, шт 1
 Образцы ткани и запасная фурнитура, комплект 1;
 Руководство по применению (Паспорт изделия), шт 1;
 Упаковка (полиэтиленовый пакет), шт 1.

Гарантия изготовителя: Предприятие-изготовитель ООО «Вектор Плюс Текстиль» гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Претензии по качеству в течение гарантийного срока направлять по адресу: 141112, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77, литера 1, объект 2, пом. 5,6,7,13.

Контактные телефоны: 8 (49656) 7-01-41, 8 (495) 740-47-79.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня реализации.

Пр-во Россия

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

Модели и артикулы изделия
КОСТЮМЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Куртка от костюма женская:

Куртка прямого силуэта, на пуговицах/кнопках



К-1 в Дентал

Куртка полуприлегающего силуэта, на пуговицах/кнопках



КХ-11 Эмма



КХ-21 Эллада



КХ-75 Жасмин

Брюки от костюма медицинские:



Брюки прямые на резинке
Бр-1 мужские/женские



Брюки прямые на резинке
Бр-2 мужские/женские



Брюки женские на резинке
Бр-3 женские

Руководство по применению/паспорт изделия
БАХИЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Внешний вид и конструкция моделей представлены на рисунках 1, 2:



Рисунок 1. Бахилы хирургические длинные
(универсальные) Б-1



Рисунок 2 Бахилы хирургические короткие
(универсальные) Б-2

Назначение: Бахилы хирургические предназначены для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой в качестве физического барьера. Применяют многократно после дезинфекции и стирки.

Показания к применению медицинского изделия: «Одежда медицинская по ТУ 14.12.30-001-56899225-2017», производства ООО «Вектор Плюс Текстиль»: использовать изделие в соответствии с его назначением.

Противопоказание: изделия не имеют медицинских противопоказаний к применению.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют.

Описание: Бахилы хирургические - в виде универсальных изделий для мужчин и женщин, коротких и длинных, изготовленных из натуральных и смесовых материалов (рис. 1, 2) представляют собой сапожок с высотой голенища не менее 30 см для длинных, и не менее 10 см для коротких, со стопой без швов, двойным дном. Бахилы на завязках длиной не менее 40 см.

Во внешний вид бахил хирургических допускается вносить изменения, не меняющие их значение, а именно:

- с завязками сзади;
- на резинке;
- из х/б ткани
- короткие;
- длинные;
- из смесовой ткани.

Материал:

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Тиси, 35% хлопок, 65% пэ, пл.110-130г/м2

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Медея, 35% хлопок, 65% пэ, пл.170-190г/м2

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Бостон, 35% хлопок, 65% пэ, пл.210-230г/м2

Порядок применения: Изделие нестерильное. Перед первым использованием обязательно постирать. При необходимости – простерилизовать.

Измерения готовых изделий должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1. Таблица значений измерений бахил мужских и женских

Размер бахил определяется измерением следа стопы от крайней точки большого пальца до крайней точки пятки.					
Размер	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52
Интервал длины стопы, см	21,7-23,5	23,6-25,5	25,6-27,5	27,6-29,5	29,6-32,5
Полнота, полнота бахил определяется измерением обхвата ноги в области икроножной мышцы	1-ая полнота	2-ая полнота	3-я полнота	4-я полнота	5-я полнота
Интервал обхвата икры, см	21,7-23,5	23,6-25,5	25,6-27,5	27,6-29,5	29,6-32,5

Требования к дезинфекции: При работе с медицинской одеждой руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", СанПиН 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Стирка и дезинфекция белья, в т.ч. загрязненного кровью и другими биологическими субстратами, осуществляется ручным и механизированным способом при строгом соблюдении требований МУ 3.5.736-99 "Технология обработки белья в медицинских учреждениях".

Изделия должны быть устойчивы к обработке и выдерживать не менее 60 циклов стирки и дезинфекции при соблюдении рекомендованных режимов:

1) замачивание в 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ого раствора моющего средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья) в течение 60 мин, с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

2) замачивание и стирка в растворе дезинфицирующего средства (ДС) "ГЛАВСТИРКА": белье замачивают в 2%-ном рабочем растворе средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья), начальная температура раствора 60°C (в процессе дезинфекции не поддерживается), время замачивания 30 мин, с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

-при совмещении режимов дезинфекции и стирки белья механизированным способом использовать 2%-ный раствор средства, температура стирки 60°C, время стирки 30мин. (без учета времени полоскания и отжима).

Изделия должны быть устойчивы к автоклавированию и выдерживать не менее 10 циклов обеззараживания в паровом стерилизаторе при режиме: 132°C в течение 60 мин. Цветное и белое белье обрабатывать отдельно.

Рекомендации по уходу: Остатки ДС и общие загрязнения удаляются общепринятыми способами, рекомендации по уходу за изделиями из текстильных материалов представлены в таблице 2. Механические воздействия, сильно уменьшенные. Полоскание обычное. Отжим ослабленный. Не выжимать руками.

Таблица 2. Рекомендации по уходу

Наименование изделия	Способы ухода				
	Стирка	Отбеливание	Сушка	Глажение	Химическая чистка
Бахилы хирургические медицинские	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре (40-60)°C с последующим полосканием и отжимом	Отбеливание только кислородосодержащим/нехлорным веществом	Сушку производить после отжима в вертикально подвешенном положении, не применять сушку в барабане	Гладить при температуре не выше 150°C, с запариванием	Профессиональная сухая чистка обычными реагентами (перхлорэтилен, гидрокарбонат, тетрахлорэтилен, бензин, уайт-спирит и трифтортрихлорэтан (фреон))

Примечание: Отбеливание применять только для изделий из тканей белого цвета.

Условия хранения: Изделия хранят в сухих закрытых вентилируемых помещениях при

температуре окружающей среды от плюс 5°С до плюс 25 °С и относительной влажности (50-80)%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды, агрессивных сред, прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты производства.

Условия транспортировки: Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Текущий ремонт: В процессе эксплуатации текущий ремонт производится по мере необходимости силами потребителя.

Утилизация: Изделия утилизируют в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам - ТБО).

Комплект поставки:

Бахилы, пара	1;
Образцы ткани, комплект	1;
Руководство по применению (Паспорт изделия), шт	1;
Упаковка (полиэтиленовый пакет), шт	1.

Гарантия изготовителя: Предприятие—изготовитель ООО «Вектор Плюс Текстиль» гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Претензии по качеству в течение гарантийного срока направлять по адресу: 141112, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77, литера 1, объект 2, пом. 5,6,7,13.

Контактные телефоны: 8 (49656) 7-01-41, 8 (495) 740-47-79.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня реализации.

Пр-во Россия

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

Руководство по применению/паспорт изделия
КОЛПАКИ МЕДИЦИНСКИЕ

Внешний вид и конструкция моделей представлены на рисунках 1, 2, 3:

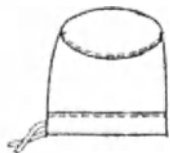


Рисунок 1
Колпак медицинский
Модель I, артикул К-1

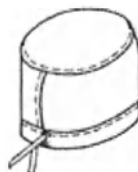


Рисунок 2
Колпак медицинский
Модель II, артикул К-2

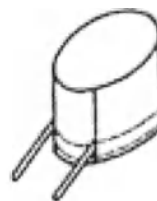


Рисунок 3
Колпак медицинский
Модель VI, артикул К-6

Назначение: Колпак медицинский предназначен для покрытия головы медицинского персонала во время различных процедур и операций с целью защиты как пациента, так и персонала от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Применяют многократно после дезинфекции и стирки.

Показания к применению медицинского изделия: «Одежда медицинская по ТУ 14.12.30-001-56899225-2017», производства ООО «Вектор Плюс Текстиль»: использовать изделие в соответствии с его назначением.

Противопоказание: изделия не имеют медицинских противопоказаний к применению.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют.

Описание: Колпаки медицинские - в виде универсальных головных уборов мужских и женских, различных конструкций, изготовленных из натуральных и смесовых материалов, представлены на рис. 1, 2, 3, состоят из стенки с доньшком или стенки с цельнокроеными или притачными бортиками различной формы, с завязками из тесьмы или с эластичной тесьмой, регулирующими размер изделия.

Во внешний вид колпаков медицинских допускается вносить изменения, не меняющие их назначения, а именно:

- из стенки с доньшком;
- из стенки с цельнокроеными бортиками;
- или притачными бортиками различной формы;
- с завязками из тесьмы, регулирующий размер колпака;
- из эластичной тесьмы, регулирующий размер колпака.

Материал:

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Тиси, 35% хлопок, 65% пэ, пл.110-130г/м²
Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Медая, 35% хлопок, 65% пэ, пл.170-190г/м²
Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Бостон, 35% хлопок, 65% пэ, пл.210-230г/м²

Порядок применения: Изделие нестерильное. Перед первым использованием обязательно постирать. При необходимости – простерилизовать.

Измерения готовых изделий должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1. Таблица значений измерений колпаков медицинских мужских и женских.

Наименование измерения	Значение измерения (см)			Допускаемые отклонения (см)
	Модел			
	I	II	VI	
Длина внутренней окружности	66,0	70,0	60,0-64,0	±0,5
Высота стенки колпака спереди	15,0	22,0	16,2	
Высота стенки колпака сзади	-	-	-	
Длина донышка	-	19,4	18,0-20,0	
Высота бортика	-	-	-	
Длина бортика	-	-	-	
Расстояние между выступами ушков	-	-	-	

Требования к дезинфекции: При работе с медицинской одеждой руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", СанПиН 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Стирка и дезинфекция белья, в т.ч. загрязненного кровью и другими биологическими субстратами, осуществляется ручным и механизированным способом при строгом соблюдении требований МУ 3.5.736-99 "Технология обработки белья в медицинских учреждениях".

Изделия должны быть устойчивы к обработке и выдерживать не менее 60 циклов стирки и дезинфекции при соблюдении рекомендованных режимов:

- 1) замачивание в 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ого раствора моющего средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья) в течение 60мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;
- 2) замачивание и стирка в растворе дезинфицирующего средства (ДС) "ГЛАВСТИРКА": белье замачивают в 2%-ном рабочем растворе средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья), начальная температура раствора 60°C (в процессе дезинфекции не поддерживается), время замачивания 30мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

-при совмещении режимов дезинфекции и стирки белья механизированным способом использовать 2%-ный раствор средства, температура стирки 60°C, время стирки 30мин. (без учета времени полоскания и отжима).

Изделия должны быть устойчивы к автоклавированию и выдерживать не менее 10 циклов обеззараживания в паровом стерилизаторе при режиме: 132°C в течение 60 мин.

Цветное и белое белье обрабатывать отдельно.

Остатки ДС и общие загрязнения удаляются способами, разработанными для ухода за изделиями из текстильных материалов (таблица 2).

Таблица 2. Рекомендации по уходу

Наименование изделия	Способы ухода				
	Стирка	Отбеливание	Сушка	Глажение	Химическая чистка
Колпаки медицинские	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре (40-60)°C с последующим полосканием и отжимом	Отбеливание только кислородосодержащим/нехлорным веществом	Сушку производить после отжима в вертикально подвешенном положении, не применять сушку в барабане	Гладить при температуре не выше 150°C, с запариванием	Профессиональная сухая чистка обычными реагентами (перхлорэтилен, гидрокарбонат, тетра-хлорэтилен, бензин, уайт-спирит и трифтор-трихлорэтан (фреон))

Примечание: Отбеливание применять только для изделий из тканей белого цвета.

Условия хранения: Изделия хранят в сухих закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5°С до плюс 25 °С и относительной влажности (50-80) %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды, агрессивных сред, прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок хранения: -24 месяца с даты производства.

Условия транспортировки: Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Текущий ремонт: В процессе эксплуатации текущий ремонт производится по мере необходимости силами потребителя.

Утилизация: Изделия утилизируют в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам - ТБО).

Комплект поставки:

Колпак, шт	1;
Образцы ткани, комплект	1;
Руководство по применению (Паспорт изделия), шт	1;
Упаковка (полиэтиленовый пакет), шт	1.

Гарантия изготовителя: Предприятие–изготовитель ООО «Вектор Плюс Текстиль» гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Претензии по качеству в течение гарантийного срока направлять по адресу: 141112, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77, литера 1, объект 2, пом. 5,6,7,13.

Контактные телефоны: 8 (49656) 7-01-41, 8 (495) 740-47-79.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня реализации.

Пр-во Россия

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

Руководство по применению/паспорт изделия
ФАРТУК МЕДИЦИНСКИЙ

Внешний вид и конструкция модели представлена на рисунке 1:

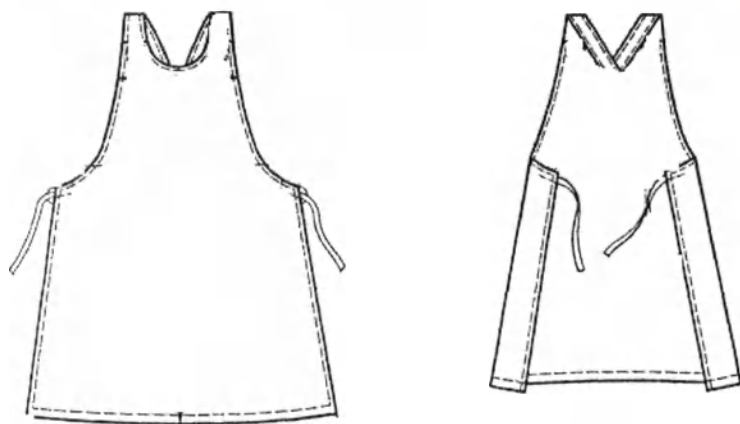


Рисунок 1. Фартук медицинский (универсальный) Ф-1

Назначение: Фартук медицинский предназначен для общей защиты во время любой процедуры, где может быть риск загрязнения передней части тела человека. Применяют многократно после дезинфекции и стирки.

Показания к применению медицинского изделия: «Одежда медицинская по ТУ 14.12.30-001-56899225-2017», производства ООО «Вектор Плюс Текстиль»: использовать изделие в соответствии с его назначением.

Противопоказание: изделия не имеют медицинских противопоказаний к применению.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют.

Описание: Фартук медицинский - универсальный фартук для мужчин и женщин в виде защитного изделия, изготовленного из натуральных и смесовых материалов, - используют в операционных палатах (ОП) и при обследовании пациентов с целью предохранения от жидкостей тела и частиц жидкости в воздухе.

Во внешний вид фартуков медицинских допускается вносить изменения, не меняющие их назначения, а именно:

- с нагрудниками различной формы;
- с различным количеством, формой и расположением карманов и клапанов;
- без карманов;
- с различными способами крепления шейных бретелей и завязок;
- с различными видами отделок (рельефы, строчки и т.д.);
- с закрытой нижней частью в виде юбки;
- с притачным нагрудником;
- с замкнутой шейной бретелью;
- с цельнокроеным нагрудником;
- с шейными бретелями из хлопчатобумажных тканей в фартуках из материалов с покрытием;
- комбинированные фартуки из двух и более видов тканей.

Материал:

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Тиси, 35% хлопок, 65% пэ, пл.110-130г/м2

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Медея, 35% хлопок, 65% пэ, пл.170-190г/м2

Ткань смесовая, хлопкополиэфирная, Бостон, 35% хлопок, 65% пэ, пл.210-230г/м2

Порядок применения: Изделие нестерильное. Перед первым использованием обязательно постирать. При необходимости – простерилизовать.

Измерения готовых изделий должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1. Таблица измерений фартука медицинского мужского и женского

Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват талии типовой фигуры человека, см			Допускаемое отклонение, см
		76-88	92-104	108-112	
Длина фартука посередине от верхнего края до низа	158,164 170,176 182,188	95,0 105,0 115,0	95,0 105,0 115,0	95,0 105,0 115,0	±1,0
Длина нагрудника посередине от верхнего края до линии талии (на уровне пришитых боковых завязок)	-	25,0	27,0	29,0	±0,5
Ширина нагрудника в верхней части фартука	-	22,0	24,0	26,0	±0,5
Ширина фартука на уровне боковых углов	-	69,0	75,0	81,0	±1,0
Ширина фартука внизу по прямой от одного края до другого	-	91,0	97,0	103,0	±1,0
Длина шейной бретели (измерять между швами притачивания)	-	57,0	59,0	61,0	±1,0

Требования к дезинфекции: При работе с медицинской одеждой руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", СанПиН 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Стирка и дезинфекция белья, в т.ч. загрязненного кровью и другими биологическими субстратами, осуществляется ручным и механизированным способом при строгом соблюдении требований МУ 3.5.736-99 "Технология обработки белья в медицинских учреждениях".

Изделия должны быть устойчивы к обработке и выдерживать не менее 60 циклов стирки и дезинфекции при соблюдении рекомендованных режимов:

- 1) замачивание в 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ого раствора моющего средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья) в течение 60 мин, с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;
- 2) замачивание и стирка в растворе дезинфицирующего средства (ДС) "ГЛАВСТИРКА": белье замачивают в 2%-ном рабочем растворе средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья), начальная температура раствора 60°C (в процессе дезинфекции не поддерживается), время замачивания 30 мин, с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

-при совмещении режимов дезинфекции и стирки белья механизированным способом использовать 2%-ный раствор средства, температура стирки 60°C, время стирки 30 мин. (без учета времени полоскания и отжима).

Изделия должны быть устойчивы к автоклавированию и выдерживать не менее 10 циклов обеззараживания в паровом стерилизаторе при режиме: 132°C в течение 60 мин.

Цветное и белое белье обрабатывать раздельно.

Рекомендации по уходу: Остатки ДС и общие загрязнения удаляются общепринятыми способами, рекомендации по уходу за изделиями из текстильных материалов представлены в таблице 2. механические воздействия, сильно уменьшенные. Полоскание обычное. Отжим ослабленный. Не выжимать руками.

Таблица 2. Рекомендации по уходу

Наименование изделия	Способы ухода				
	Стирка	Отбеливание	Сушка	Глажение	Химическая чистка
Фартук медицинский	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре (40-60)°C с последующим полосканием и отжимом	Отбеливание только кислотосодержащим/хлорным веществом	Сушку производить после отжима в вертикально подвешенном положении, не применять сушку в барабане	Гладить при температуре не выше 150°C, с запариванием	Профессиональная сухая чистка обычными реагентами (перхлорэтилен, гидрокарбонат, тетрахлорэтилен, бензин, уайт-спирит и трифтортрихлорэтан (фреон))

Примечание: Отбеливание применять только для изделий из тканей белого цвета.

Условия хранения: Изделия хранят в сухих закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5°C до плюс 25 °C и относительной влажности (50-80) %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды, агрессивных сред, прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты производства.

Условия транспортировки: Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Текущий ремонт: В процессе эксплуатации текущий ремонт производится по мере необходимости силами потребителя.

Утилизация: Изделия утилизируют в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам - ТБО).

Комплект поставки

Фартук, шт	1;
Образцы ткани, комплект	1;
Руководство по применению (Паспорт изделия), шт	1;
Упаковка (полиэтиленовый пакет), шт	1

Гарантия изготовителя: Предприятие-изготовитель ООО «Вектор Плюс Текстиль» гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Претензии по качеству в течение гарантийного срока направлять по адресу: 141112, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77, литера 1, объект 2, пом. 5,6,7,13.

Контактные телефоны: 8 (49656) 7-01-41, 8 (495) 740-47-79.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня реализации.

Пр-во Россия

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

Всего пронумерованно и сшито
29 (двадцать девять) листов
_____ 2018 г.
 Александр _____
(Александр)
МП