


МИЦАР-ЭЭГ

Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический «Мицар-ЭЭГ»

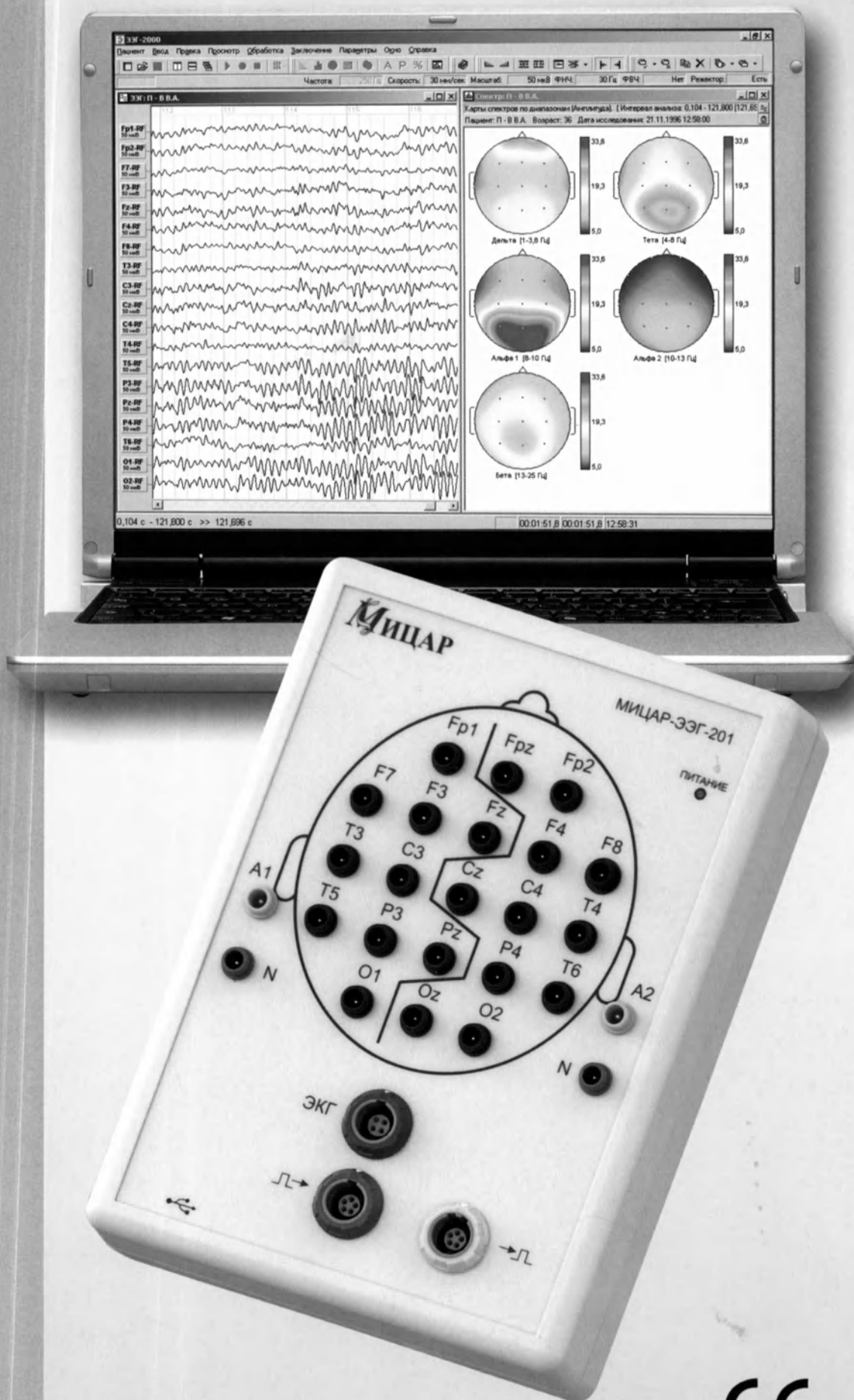

Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический «Мицар-ЭЭГ»

Комплекс предназначен для проведения клинических ЭЭГ исследований и ЭЭГ-мониторинга в условиях медицинского учреждения и при выездных обследованиях. Прибор и пакет программного обеспечения для Windows XP позволяет проводить компьютерный анализ ЭЭГ на стандартном персональном компьютере или портативном компьютере типа Notebook.



УСИЛИТЕЛИ И ФОТОСТИМУЛЯТОР

Простой в использовании 19 или 21-канальный электроэнцефалограф с полиграфическим каналом и входом внешних событий. Обеспечивает надежную регистрацию ЭЭГ в сложных условиях без экранированной камеры.

Возможности программного обеспечения

РЕГИСТРАЦИЯ ЭЭГ

Оцифрованная ЭЭГ сохраняется на жестком диске для последующего анализа. Продолжительность записи ограничена только объемом жесткого диска. При регистрации сигналы непрерывно отображаются на экране монитора в стандартных масштабах (соответствующих бумажной записи ЭЭГ), что облегчает чтение ЭЭГ. Фотостимулятор управляется как «вручную», так и с помощью определенных программ фотостимуляции. Обеспечивается контроль качества установки (измерение сопротивления) электродов. Ввод ЭЭГ возможен в любом монтаже и для любого числа каналов.

