

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»



О.Е. Балашов

«25» апреля 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


медицинского изделия

**ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ
«ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
по ТУ 14.31.10 - 001 – 46838010 - 2018**


2019



Общий вид медицинского изделия:
Гольфы медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
женские с открытым носком

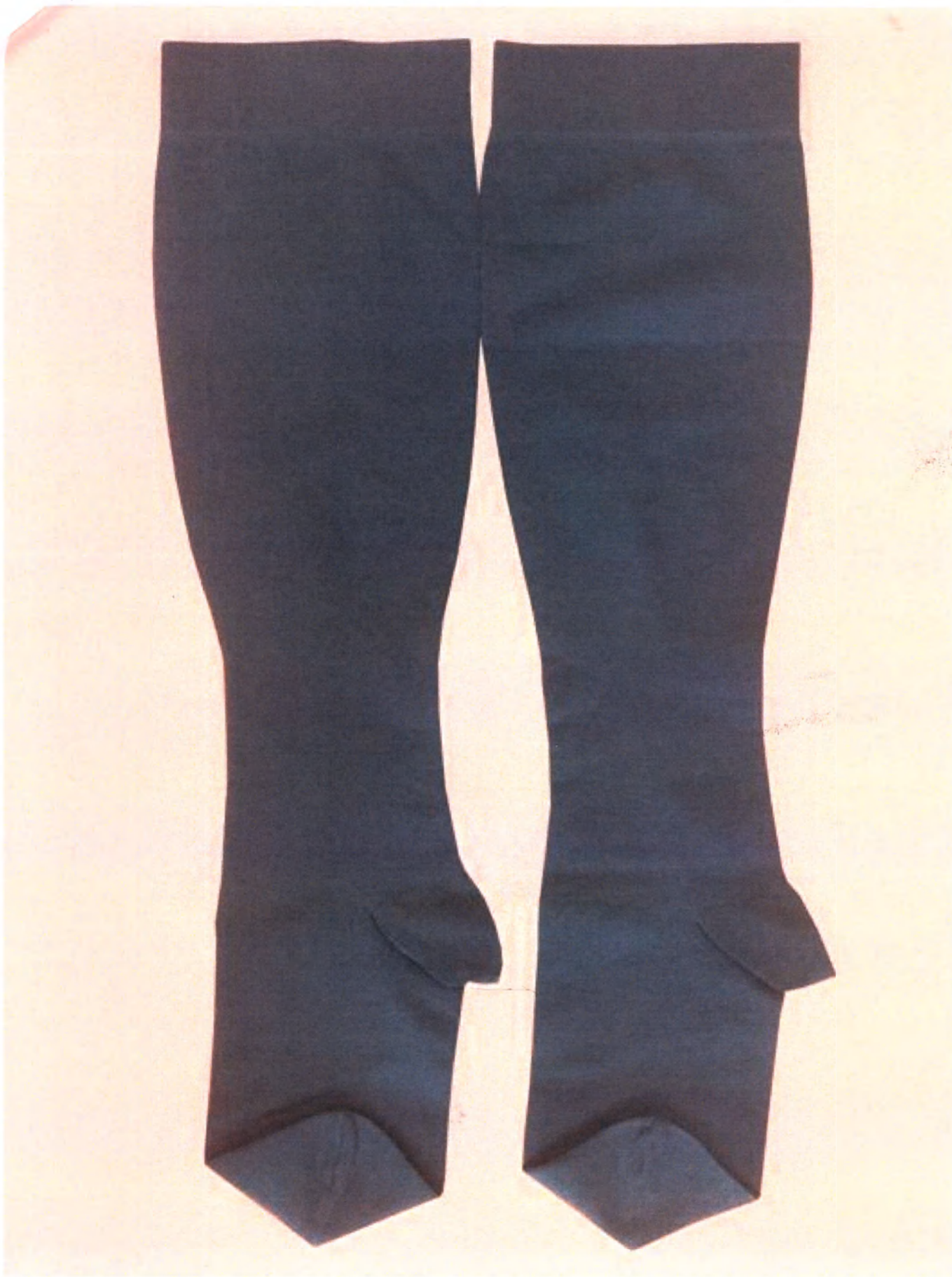

Общий вид медицинского изделия:
Гольфы медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
женские с закрытым носком

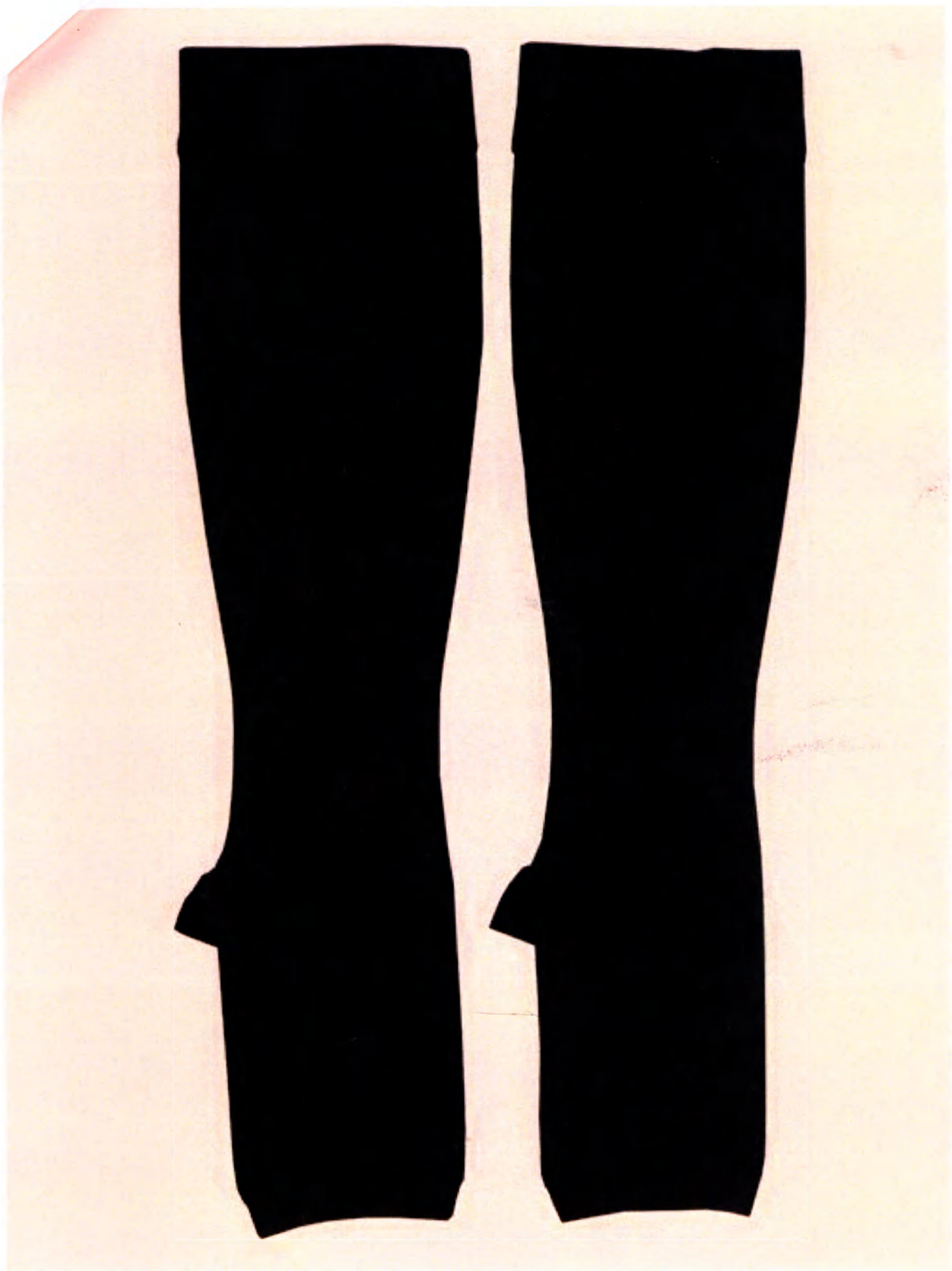

Общий вид медицинского изделия:
Гольфы медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
мужские с открытым носком




Общий вид медицинского изделия:
Гольфы медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
мужские с закрытым носком



Общий вид медицинского изделия:
Чулки медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
с резинкой с открытым носком



Общий вид медицинского изделия:
Чулки медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
с резинкой с закрытым носком

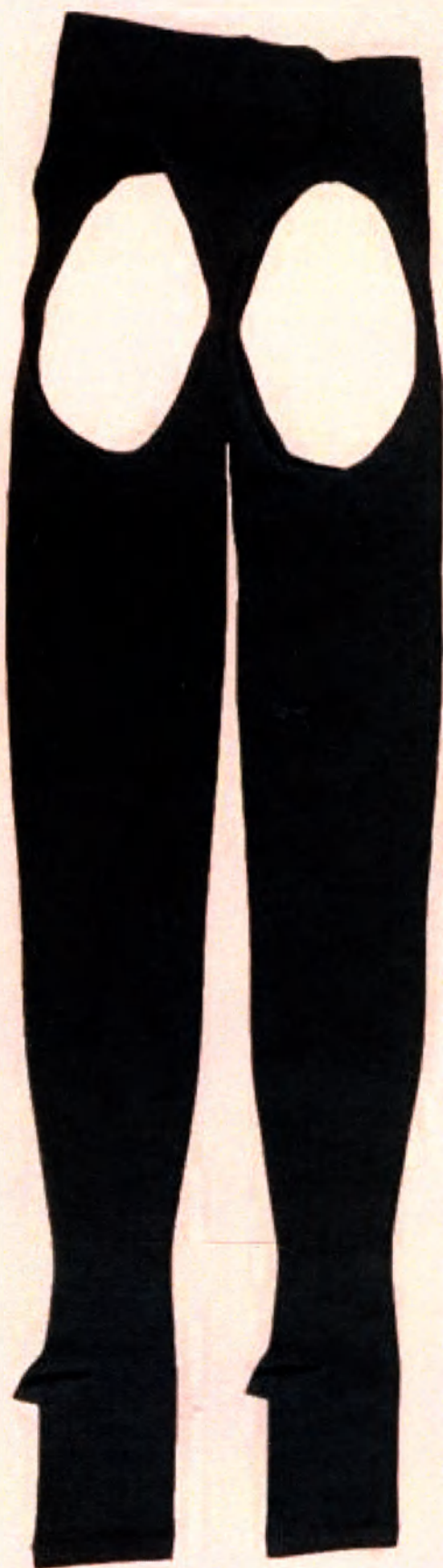

Общий вид медицинского изделия:
Чулки медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
с поясом с открытым носком



Общий вид медицинского изделия:
Чулки медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
с поясом с закрытым носком



Общий вид медицинского изделия:
Чуллок медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
«Моночулок» с открытым носком



Общий вид медицинского изделия:
Чуллок медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
«Моночулок» с закрытым носком



Общий вид медицинского изделия:
Колготки медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»



Общий вид медицинского изделия:
Колготки медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
для беременных



**Общий вид медицинского изделия, упакованного в пакет, который вкладывается в
потребительскую упаковку на примере медицинского изделия:
«Гольфы медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
женские с открытым носком»**



Общий вид потребительской упаковки на примере медицинского изделия:
«Гольфы медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
женские с открытым носком» (лицевая сторона)

Изделия медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»

Гольфы «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ» женские с открытым носком

Назначение: для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики варикозного расширения вен и нормализации кровообращения в области конечностей, в том числе при длительных статических нагрузках, во время авиаперелетов и в период беременности.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Показания к применению: отеки, варикозное расширение вен, сосудистая недостаточность, операционные вмешательства на нижних конечностях, дискомфорт и усталость.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности:

Использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. При наличии нарушений со стороны заболеваний сердца и легких, при диабете и выраженных проявлениях варикозной болезни перед применением посоветуйтесь с врачом.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: утром, не вставая с постели, сидя, заняв удобную, устойчивую позу (желательно держать ноги в горизонтальном положении) надеть изделие на конечность, равномерно (без складок) распределив его по длине. Снимать изделие нужно также аккуратно, как и надевать. Изделие следует стягивать по направлению к стопе, взяв его за верхний край. Затем вывернуть его основную часть наизнанку, далее аккуратно стянуть с пятки и носочной части ступни.

Рекомендации по уходу: ручная стирка изделий с применением жидкого мыла или детских стиральных порошков при температуре, не превышающей 40 °C, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при температуре 20±5 °C на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния. **Внимание:** не использовать щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. **Запрещается:** кипятить изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Конструкция: изделия имеют контурную форму, соответствующую анатомической конфигурации нижних конечностей.

Условия хранения: в сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C по условиям хранения 1 (А), в местах недоступных для детей. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизолирующих приборов.

Условия утилизации: использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10. Допускается утилизировать неиспользованные изделия, утратившие товарный вид, вместе с бытовыми отходами.

Изделия подходят для ежедневного использования.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией или рекомендациями по применению.

Таблица подбора изделия

Размер изделия	
обхват в области голеностопного сустава, см. (b)	19-32
обхват в области икроножной мышцы, см. (c)	29-51
Размер стопы	35-41

Примечание: Производитель гарантирует, что Изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблице выше.

Сделано в России.

Срок хранения изделий - 5 лет с даты изготовления. Не использовать изделия по истечении срока хранения. Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

ТУ 14.31.10-001-46838010-2018

РУ №ФСР

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва,

ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Адрес производства: Россия, 143964, г. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5

Тел./Факс: +7 (495) 528-86-82/51-09

www.bint.ru/info@bint.ru


1 класс компрессионного
давления
от 18 до 21 мм рт. ст.

ВНИМАНИЕ!

Приобретенные чулочно-носочные изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других форм, размеров, габаритов, фасона, расцветок или комплектации (Постановление правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. от 30.05.2018)).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПОДБОРА ИЗДЕЛИЯ

Измерения для подбора изделий рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

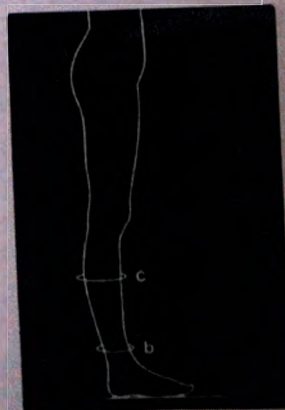

Общий вид потребительской упаковки на примере медицинского изделия:
«Гольфы медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
женские с открытым носком» (оборотная сторона)

Макет потребительской упаковки на примере медицинского изделия:
«Гольфы медицинские эластичные компрессионные «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ» женские с открытым носком»



скреплено печатью
18 лист 06

Директор
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
Балашов О.Е.

