




ИХА-ФЕНЦИКЛИДИН-ФАКТОР

1. Вскрыть пакет и достать полоску
2. Перед началом определения образцы и полоска должны быть выдержаны при комнатной температуре (18-25°C) не менее 5 мин.
3. Опустить в порцию мочи полоску стрелками вниз до обозначенной линии на 30-60 секунд
4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут.

TV 9398-321-51062356-03

Только для импортеров автомобилей

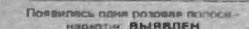

Появились две розовые пятнышки
на кончике носа

MAX

[illegible]