

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



194406B0/001691

号码 No.

兹证明：在所附文件上的广东百合医疗科技股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized

Signature:

Chen Xing

日期: 2019年02月26日

(Date: Feb. 26, 2019)



Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd
No. 89, Taoyuan East Road, Nanhai, Foshan, 528225
Guangdong Province, China
Tel: 86-757-81207300 Fax: 86-757-81207311
www.baihemedical.com/en/

广东百合医疗科技股份有限公司
广东省佛山市南海区桃园东路89号
电话: 86-757-81207300 传真: 86-757-81207311
网址: www.baihemedical.com/ch/
邮箱: able@baihemedical.com

To Roszdravnadzor
From Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.

We send you the following document for a medical device registration in the Russian Federation:

Operational documentation for **Central venous catheterization kit ABLE** (Набор для катетеризации центральных вен ABLE) in Russian.

Issued date: Feb. 13, 2019

Gao Fengyi Vice president

Signature



ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Набор для катетеризации центральных вен ABLE

**Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. (Гуандун Байхэ Медикал Текнолоджи
Ко., Лтд.), Китай**

Наименование медицинского изделия: Набор для катетеризации центральных вен ABLE

Наименование производителя, адрес: Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.
(Гуандун Байхэ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китайская Народная Республика.

Назначение: Изделие предназначено для облегчения инфузионной терапии в условиях интенсивной терапии.

Область применения: трансфузиология.

Потенциальный потребитель:

Введение и удаление катетера должно производиться только квалифицированным сертифицированным врачом или медсестрой.

Противопоказания:

1. Инфекция или резаная рана в зоне прокола.
2. Нарушение свертывания крови.
3. Одновременное проведение терапии антикоагулянтами.
4. Признаки невозможности проведения пункции, такие как, такие как пневмоторакс, склероз вен.
5. Отклонения или неясная анатомическая ситуация в области введения, такие как тяжелая эмфизема, очевидная невозможность проведения пункции на основании предыдущего введения.

Побочные действия, осложнения:

Следует провести оценку клинической пользы применения центрального венозного катетера, в сравнении с известными рисками и возможными осложнениями процедуры, которые включают (но не ограничиваясь приведенным списком):

1. Инфекция, некроз в точке прокола.
2. Образование тромба.
3. Воздушная эмболия.
4. Пневмоторакс и/или гемопневмоторакс.
5. Инфекция канала прокола.
6. Подкожная гематома.

Предупреждения и меры предосторожности:

1. Введение и извлечение катетера должно осуществляться только имеющим соответствующую квалификацию врачом или медицинской сестрой;
2. Следует провести оценку клинической пользы применения центрального венозного катетера, в сравнении с известными рисками и возможными осложнениями процедуры.
3. Не использовать если упаковка была вскрыта или повреждена, либо если любой элемент катетера отсутствует или поврежден.

4. Всегда при обращении с катетером и/или компонентами, используемыми для его введения, необходимо применять асептические методики и следовать стандартным протоколам, принятым в медицинском учреждении.
5. Положение кончика катетера контролируют с помощью рентгеновского излучения.
6. С катетером следует использовать только соединители с наконечниками Люэра (с резьбой), при этом не перетягивая их.
7. Не допускается использование ацетона или раствора этанола в отношении любых частей трубки катетера, поскольку это может привести к повреждению катетера.
8. В сосуд допускается вводить только гибкий конец проводника. Никогда не следует манипулировать проводником в случае, если ощущается сопротивление. В этом случае необходимо прервать процедуру и извлечь проводник и изделие в качестве единого блока.
9. Не подвергать повторной стерилизации.

Описание изделия:

Центральные венозные катетеры (ЦВК) ABLE представляют собой серию стерильных одноразовых полиуретановых катетеров для кратковременного использования, разработанных для облегчения инфузионной терапии в условиях интенсивной терапии. Катетеры доступны в четырех конфигурациях: с одиночным, двойным, тройным и четверным просветом, и имеют различную длину. Многопросветные варианты предоставляют отдельные просветы для инфузионной терапии, мониторинга давления и забора образцов венозной крови. ЦВК выпускают в упаковке вместе с компонентами и принадлежностями, необходимыми для их чрескожного введения. Все наборы с центральным венозным катетером стерилизованы этиленоксидом.

Набор для катетеризации центральных вен ABLE могут применяться для одной из следующих целей:

- Мониторинг центрального венозного давления;
- Непрерывные или прерывистые внутривенные вливания;
- Забор образцов крови.

Катетер хирургически вводят в одну из трех опциональных точек, в зависимости от клинических требований, с использованием метода Сельдингера. Местами введения катетера являются:

1. Внутренняя яремная вена;
2. Подключичная вена;
3. Бедренная вена.

Возможна установка катетера в организме пациента на срок не более 30 дней.

Если длительность присутствия катетера в вене превышает 30 дней, может возникнуть риск врастания катетера в ткани, что может привести к серьезным последствиям.

Состав медицинского изделия: см. Приложение 1.

Основные технические характеристики: см. Приложение 2

Сведения о стерильности и кратности применения.

Изделие стерильное, одноразовое.

Стерилизовано оксидом этилена.

Предполагаемые направления введения

Медицинские методы и процедуры, описанные в этих инструкциях, не охватывают все приемлемые с медицинской точки зрения протоколы, а также они не могут заменить врачебный опыт и заключение врача относительно лечения конкретного пациента.

Подготовка

1. Выбор места введения, а также соответствующего типа и длины катетера остается на усмотрение врача.
2. Промывают каждый просвет катетера физиологическим солевым раствором для вытеснения воздуха, затем закрывают удлинители катетера для предотвращения вытекания солевого раствора из катетера. Для этого используют встроенные фиксаторы, входящие в комплект поставки.

Введение

1. Используют соответствующую местную анестезию для полного анестезирования места введения.
2. Вводят иглу интродьюсера в вену. Для обеспечения надлежащего расположения иглы, осуществляют аспирацию.
3. Вводят гибкий конец проводника в иглу интродьюсера и продвигают проводник вперед в вену. При необходимости, используют ультразвук для подтверждения правильности введения.
4. Извлекают иглу, оставляя проводник в сосуде и увеличивают кожный прокол с помощью скальпеля.
5. Надевают расширитель сосудов на проксимальный конец проводника и расширяют подкожные ткани и стенки вены для облегчения введения катетера.
6. Удаляют расширитель сосудов, оставляя проводник на месте.
7. Открывают дистальный фиксатор удлинителя и надевают катетер на проксимальный конец проводника.
8. Продвигают катетер через подкожные ткани в целевую вену.
9. После подтверждения правильности расположения катетера, извлекают проводник и закрывают фиксатор.
10. Присоединяют шприц к каждому из удлинителей по очереди. Открывают фиксатор, должна произойти легкая аспирация крови. Если просветы демонстрируют избыточное сопротивление аспирации крови, катетер может быть необходимо повернуть или изменить его положение, для достижения адекватного кровотока.
11. После достижения адекватной аспирации каждый просвет необходимо закрыть, в соответствии со стандартными протоколами, принятыми в медицинском учреждении.
12. Закрывают фиксатор и присоединяют инъекционный колпачок (колпачки) к канюле (канюлям) Люэра удлинительной линии.

Фиксация катетера и наложение повязки

Катетер должен быть зафиксирован, и на место введения должна быть наложена повязка, в соответствии со стандартными протоколами, принятыми в медицинском учреждении.

“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не следует прошивать саму трубку катетера.” Необходимо фиксировать крепление катетера.

Если катетер не предполагается использовать немедленно, необходимо следовать стандартным протоколам, принятым в медицинском учреждении, для его блокировки.

Инфузия

1. Запирающий раствор следует удалить из всех просветов перед началом инфузии и аспирации в соответствии со стандартными протоколами, принятыми в медицинском учреждении.
2. Перед началом инфузии следует тщательно проверить все соединения. Протоколы инфузии должен определить врач.

Забор крови

При заборе образцов крови через катетер временно перекрывают другие просветы, через которые осуществляют инфузию растворов.

Ежедневный уход

Необходимо осуществлять ежедневный уход за местом прокола в соответствии со стандартными протоколами, принятыми в медицинском учреждении.

Извлечение катетера

1. Осторожно удаляют все устройства, закрепляющие катетер, и повязки, затем медленно извлекают катетер.
2. Прилагают давление к точке выхода катетера приблизительно на 10-15 минут, либо до остановки кровотечения.
3. Накладывают повязку в соответствии со стандартными протоколами, принятыми в медицинском учреждении.
4. Утилизируют изделие как загрязненное медицинское изделие в соответствии с протоколами, принятыми в медицинском учреждении.

Назначение компонентов наборов:

№	Наименование изделия	Назначение изделия
1.	Центральный венозный катетер однопросветный/двухпросветный/трехпросветный/четырёхпросветный с цилиндрическим/круглым/ треугольным коннектором	Предназначен для введения в вену на шее или грудную вену для внутривенной инфузии питательных веществ, жидкостей, химиотерапевтических веществ или других лекарственных средств, а также взятия и доставки образцов крови. Может использоваться для контроля венозного давления.

2.	Проводник катетера проволочный	Предназначен для чрескожного размещения в сердечно-сосудистой системе и функционирования в качестве проводника при введении и позиционировании катетера для гемодиализа.
3.	Расширитель сосудов	Используется для расширения кожи в месте введения катетера.
4.	Игла проводниковая прямая или Y-образная	Используется для осуществления первоначального чрескожного прокола для получения доступа к вене и/или артерии во время катетеризации сосудов, затем через нее вводится проводник катетера проволочный.
5.	Зажим	Используется для регулирования скорости/остановки инфузии за счет сжимания стенок катетера.
6.	Зажим для катетера	Используется для фиксации центрального венозного катетера.
7.	Игла инъекционная 22G длиной 17 мм	Предназначена для использования вместе со шприцами для подготовки и введения пациенту жидкостей/лекарственных средств.
8.	Шприц для введения 5 мл	Используется вместе с проводниковой иглой для осуществления первоначального чрескожного прокола для получения доступа к вене и/или артерии во время катетеризации сосудов.
9.	Трехходовой кран	Используется для инфузии лекарственных средств или других жидкостей в просвет катетера, а также для прекращения введения препаратов.
10.	Разъем иглы положительного давления свободный	Используется для введения лекарственных средств или других жидкостей.
11.	Разъем иглы отрицательного давления свободный	Используется для введения лекарственных средств или других жидкостей.
12.	Заглушка инъекционная	Используется для введения гепаринового раствора.
13.	Шприц, объемом 5 мл	Предназначен для использования вместе с инъекционной иглой для подготовки и введения пациенту жидкостей/лекарственных средств.
14.	Игла инъекционная 18G длиной 38 мм	Предназначена для использования вместе со шприцами для подготовки и введения пациенту жидкостей/лекарственных средств.
15.	Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами	Перчатки хирургические используются как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами.
16.	Тампон хирургический 19×14 мм	Используется для поглощения жидкостей, очистки раны и/или остановки кровотечения.
17.	Простыня хирургическая 80×60 см	Защитное покрытие, обеспечивающее чистое и сухое стерильное поле во время процедуры и предотвращающее загрязнение.
18.	Полотенце хирургическое , в сложенном состоянии 8×10 см	Предназначено для обтирания или высушивания неповрежденной кожи пациентов, очищения медицинских изделий/оборудования и/или очищения других предметов в помещении.
19.	Щетка стерильная	Используется для очистки раны.
20.	Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев	Используется для защиты раны.
21.	Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с	Предназначен для сшивания краев раны.

	прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм	
22.	Раневая повязка 8×12 см	Фиксированная раневая повязка используется для защиты места введения катетера.
23.	Скальпель	Используется врачом для разрезания тканей.

Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие: см. Приложение 3

Условия транспортирования, условия хранения; условия применения/эксплуатации

• **Хранение**

- Изделия следует хранить в прохладном, вентилируемом и сухом месте, при температуре ниже 40°C и при относительной влажности от 30% до 80%.
- Следует оберегать упакованные изделия от воздействия прямого солнечного излучения и от грызунов.
- Изделие не должно напрямую контактировать с такими металлами, как медь, марганец и железо.
- Изделие не должно входить в контакт с масляными фенольными антисептиками или их производными, жировыми веществами, вазелином или другими связанными соединениями.
- Стерильность должна быть обеспечена за счет сохранности и отсутствия повреждений упаковки.

• **Транспортировка**

Температура: 20~40 °C
Влажность: 30%—80%

• **Эксплуатация**

Температура: 20~40 °C
Влажность: 30%—80%

Маркировка с расшифровкой символов (потребительская, транспортная).

		
Производитель	Представитель в ЕС	Дата производства
		
Дата окончания срока годности	Номер партии	Номер по каталогу
		
Стерилизовано	Не использовать, если	Верхний предел

этиленоксидом	упаковка повреждена	температуры
		
Не использовать повторно	Обратитесь к инструкции по применению	Не подвергать повторной стерилизации

Требования к охране окружающей среды, сведения по утилизации или уничтожению. Класс опасности отходов в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10.

Это медицинское изделие после использования должно быть утилизировано с отходами в соответствии с требованиями медицинского учреждения или департамента по охране окружающей среды.

1. Необходимо собирать медицинские отходы таким образом, чтобы не наносить вред и минимизировать угрозу здоровью, безопасности и окружающей среде.
2. Следует хранить все контейнеры с медицинскими отходами в охраняемой зоне.
3. Следует обеспечить наличие в легко доступном месте всего необходимого оборудования для очистки и дезинфекции зоны утечки на случай случайной утечки.
4. Следует перерабатывать все отходы, смешанные с медицинскими отходами, как медицинские отходы.
5. Необходимо собирать все медицинские отходы, кроме острых, в маркированные желтые пластиковые пакеты повышенной прочности или влагостойкие бумажные пакеты. Пакеты, предназначенные для домашнего использования, не подходят для таких отходов.
6. Следует завязывать пакеты так, чтобы предотвратить протекание или выброс твердых или жидких отходов во время хранения, переноски или перевозки, также необходимо убедиться, что они не будут спрессованы в каком-либо прессующем устройстве.
7. Медицинские отходы должны быть уничтожены в установке для сжигания отходов, лицензированной регулятивным органом региона или территории, где располагается установка по сжиганию отходов.

- **Класс опасности отходов в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10**
Класс Б - эпидемиологически опасные отходы.

Срок годности / Срок службы.

Стерилизация действительна в течение трех лет.

Перед использованием необходимо проверить состояние изделия. Компания Байхе Медикал не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный людям, собственности и т.д. в связи с любым неправильным или не соответствующим рекомендациям

использованием изделия, включая его повторное использование. Повторное использование может привести к инфекциям, которые в серьезных случаях могут стать причиной смерти

Гарантийные обязательства (адрес для обращения потребителей на территории РФ (уполномоченный представитель производителя), ответственность производителя, гарантийный срок).

Отказ от ответственности

Перед использованием необходимо проверить состояние изделия. Компания Байхе Медикал не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный людям, собственности и т.д. в связи с любым неправильным или не соответствующим рекомендациям использованием изделия, включая его повторное использование. Повторное использование может привести к инфекциям, которые в серьезных случаях могут стать причиной смерти.

Адрес организации для обращения потребителей.

Наименование: ООО «Гала-Оптика»

Адрес: 119071, г. Москва, ул. Калужская М., д.15 ,стр.1, эт. 2, пом. I, ком. 84

Телефон:8 (495) 955-90-92

Электронная почта:*info@gala-opt.ru*

Набор для катетеризации центральных вен ABLE

Варианты исполнения:

I. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый

1. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1221 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018"×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

2. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1222 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 8 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018"×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

3. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1223 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 10 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018"×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

4. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1224 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 13 см – 1 шт.;

- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018"×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

5. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1225 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018"×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

6. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1226 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018"×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

7. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1321 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021"×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;

- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

8. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1322 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 8 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

9. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1324 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

10. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1325 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

11. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1326 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;

- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

12. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1421 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

13. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1422 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 8 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

14. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1424 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;

- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

15. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1425 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

16. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1426 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

17. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1428 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025”×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

18. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1524 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 16G, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;

- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

19. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1525 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 16G, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

20. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1526 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 16G, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

21. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1528 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 16G, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

22. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1624 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

23. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1625 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

24. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1626 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

25. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-1628 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 1 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;

- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

26. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2421 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018"×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или зажим – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

27. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2421 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 4Fr, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018"×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла инъекционная прямая, 20G длиной 33 мм или игла инъекционная Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

28. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2422 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 8 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018"×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

29. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2422 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 4Fr, длиной 8 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018"×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;

- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

30. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2424 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

31. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2424 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 4Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

32. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2425 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

33. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2425 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 4Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

34. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2426 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

35. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2426 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 4Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

36. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2521 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;

- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

37. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2521 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 5Fr, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

38. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2522 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 8 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

39. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2522 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 5Fr, длиной 8 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

40. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2524 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;

- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

41. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2524 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 5Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

42. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2525 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

43. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2525 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 5Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;

- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

44. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2526 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

45. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2526 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 5Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

46. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2724 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

47. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2724 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;

- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

48. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2725 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

49. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2725 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

50. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2726 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

51. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2726 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 20 см – 1 шт.;

- Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

52. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2727 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 25 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

53. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2727 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 25 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

54. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2728 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;

- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

55. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-2728 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

56. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2824 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

57. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2825 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

58. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2826 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;

- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

59. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2828 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

60. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2924 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8,5Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

61. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2925 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8,5Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

62. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2926 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8,5Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт.;

- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

63. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-2928 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

64. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3421 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

65. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3422 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 8 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;

- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

66. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3424 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

67. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3425 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×5 см, или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

68. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3426 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

69. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-342906 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 6 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см или расширитель сосудов размером 6F×5 см или расширитель сосудов 6,5F×5 см – 1 шт.;

- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

70. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-3521 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 5.5Fr, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

71. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3521 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

72. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-3522 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 5.5Fr, длиной 8 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

73. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3522 в составе:
- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 8 см – 1 шт.;
 - Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
 - Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
 - Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
 - Зажим – 3 шт.;
 - Зажим для катетера – 1 шт.;
 - Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
 - Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
 - Заглушка инъекционная – 3 шт.;
 - Трехходовой кран – 1 шт.;
 - Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
 - Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.
74. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-3524 в составе:
- Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 5.5Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
 - Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
 - Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
 - Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
 - Зажим – 3 шт.;
 - Зажим для катетера – 1 шт.;
 - Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
 - Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
 - Заглушка инъекционная – 3 шт.;
 - Трехходовой кран – 1 шт.;
 - Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
 - Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.
75. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3524 в составе:
- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
 - Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
 - Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
 - Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
 - Зажим – 3 шт.;
 - Зажим для катетера – 1 шт.;
 - Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
 - Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
 - Заглушка инъекционная – 3 шт.;
 - Трехходовой кран – 1 шт.;
 - Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
 - Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.
76. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-3525 в составе:
- Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 5.5Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
 - Проводник катетера проволоочный, размером 0,021×50 см – 1 шт.;
 - Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
 - Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
 - Зажим – 3 шт.;
 - Зажим для катетера – 1 шт.;

- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

77. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3525 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

78. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-3526 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 5.5Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

79. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3526 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

80. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-3724 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

81. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3724 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

82. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-3725 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

83. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3725 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;

- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

84. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-3726 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

85. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3726 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

86. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3727 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 25 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

87. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-3727 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 25 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;

- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

88. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FC-3728 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

89. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-3728 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 3 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

90. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-4924 в составе:

- Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 4 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 4 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;

- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

91. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-4925 в составе:

- Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 4 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 4 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

92. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-4926 в составе:

- Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 4 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 4 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

93. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-4928 в составе:

- Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволочный, размером 0,035”×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 4 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 4 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.

II. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный

1. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1261 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт.;

- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 2 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

2. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1262 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 8 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

3. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1263 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 10 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

4. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1264 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 13 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

5. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1265 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 16 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

6. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1266 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 20 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×60 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

7. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1361 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 5 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

8. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1362 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 8 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

9. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1364 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 13 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

10. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1365 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 16 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

11. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1366 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 20 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×60 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

12. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1461 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 5 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025"×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

13. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1462 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 8 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025"×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

14. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1464 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 13 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

15. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1465 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 16 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

16. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1466 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 20 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025”×60 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

17. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1468 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 30 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,025”×70 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

18. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1564 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 16G, длиной 13 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

19. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1565 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 16G, длиной 16 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

20. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1566 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 16G, длиной 20 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×60 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

21. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1568 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 16G, длиной 30 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×70 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

22. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1664 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 13 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

23. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1665 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 16 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

24. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1666 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 20 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032"×60 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

25. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1668 в составе:

- Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 30 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,032"×70 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 1 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 1 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

26. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2461 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 5 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

27. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2462 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 8 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт;-
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;

- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

28. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2464 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

29. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2465 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;

- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

30. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2466 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,018”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

31. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2561 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 5 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;

- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

32. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2562 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 8 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021"×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт;

33. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2564 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 13 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021"×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;

- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

34. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2565 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 16 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

35. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2566 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 20 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×60 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;

- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

36. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2764 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 13 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035"×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

37. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2765 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 16 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035"×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;

- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

38. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2766 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035"×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

39. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2768 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035"×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;

- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

40. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FC-2767 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 25 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035"×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

41. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2864 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035"×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 2 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 2 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;

- Скальпель – 1 шт.

42. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2865 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 16 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

43. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2866 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 20 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

44. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2868 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 30 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×70 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

45. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2964 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 13 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

46. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2965 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 16 см – 1 шт;

- Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

47. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2966 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 20 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

48. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2968 в составе:

- Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 30 см – 1 шт;

- Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×70 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 2 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 2 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

49. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3461 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 5 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

50. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FC-346906 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 4 Fr, длиной 6 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

51. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3462 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 8 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;
- или Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

52. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3464 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 13 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;

- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

53. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3465 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 16 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

54. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3466 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 20 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×60 см – 1 шт;

- Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

55. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3561 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 5 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

56. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3562 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 8 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

57. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3564 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 13 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

58. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3565 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 16 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×50 см – 1 шт;

- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

59. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3566 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 20 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,021”×60 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

60. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3764 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 13 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт;

- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

61. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3765 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 16 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

62. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3766 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 20 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;

- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

63. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3767 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 25 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 3 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.

64. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3768 в составе:

- Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 30 см – 1 шт;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×70 см – 1 шт;
- Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см – 1 шт;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт;
- Зажим – 3 шт;
- Зажим для катетера – 1 шт;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм– 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт;

- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 3 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

65. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-4964 в составе:

- Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 13 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 4 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 4 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

66. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-4965 в составе:

- Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 16 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×50 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 4 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;

- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 4 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

67. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-4966 в составе:

- Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 20 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×60 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 4 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;
- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт.;
- Заглушка инъекционная – 4 шт.;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт.;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт.;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт.;
- Щетка стерильная – 3 шт.;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт.;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт.;
- Скальпель – 1 шт.

68. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-4968 в составе:


- Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 30 см – 1 шт.;
- Проводник катетера проволоочный, размером 0,035”×70 см – 1 шт.;
- Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см – 1 шт.;
- Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм – 1 шт.;
- Зажим – 4 шт.;
- Зажим для катетера – 1 шт.;
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм – 1 шт.;
- Шприц для введения 5 мл – 1 шт.;
- Трехходовой кран – 1 шт.;
- Разъем иглы положительного давления свободный – 1 шт.;

- Разъем иглы отрицательного давления свободный – 1 шт;
- Заглушка инъекционная – 4 шт;
- Шприц, объемом 5 мл – 1 шт;
- Игла инъекционная 18G длиной 38 мм – 1 шт.;
- Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами – 1 пара;
- Тампон хирургический 19×14 мм – 2 шт;
- Простыня хирургическая 80×60 см – 1 шт;
- Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см – 1 шт;
- Щетка стерильная – 3 шт;
- Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев – 4 шт;
- Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм – 1 шт.;
- Раневая повязка 8×12 см – 1 шт;
- Скальпель – 1 шт.


1.	Центральный венозный катетероднопросветный/двухпросветный/трехпросветный/четырепросветный с цилиндрическим/круглым/треугольным коннектором	<i>Однопросветный с цилиндрическим коннектором</i>  <i>Двухпросветный с треугольным коннектором</i>
----	---	--



Трехпросветный с круглым коннектором:

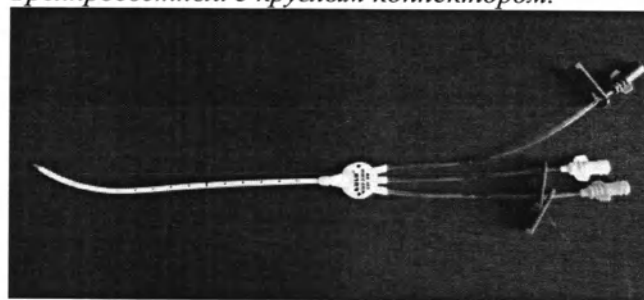

Четырехпросветный с круглым коннектором:

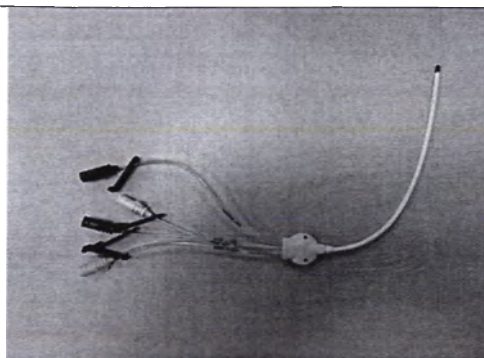

Усилие на разрыв: не менее 15 Н.

При визуальном контроле невооруженным глазом или (при необходимости) с применением увеличения в 2,5 раза поверхность катетера **не имеет посторонних включений**.

Наружная поверхность эффективной длины катетера, включая дистальный конец, **не имеет технологических и поверхностных дефектов** и обеспечивает минимальное травмирование сосудов в процессе его использования.
Катетеры рентгеноконтрастные

Наконечник дистального конца гладкий, закругленный, конусообразный.

Пропускная способность:

Номинальный диаметр < 1 мм:


Уровень потока от 80 до 125% при заданном значении

Номинальный диаметр ≥ 1 мм

Уровень потока от 90 до 115% при заданном значении

Разметка: Расстояние между отметками не превышает 5 см.

2. Проводник катетера
проволочный

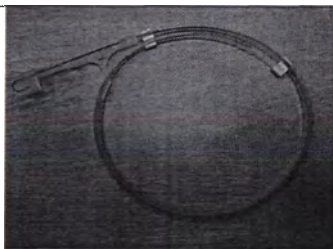

Проволочный проводник должен быть видим при рентгенологическом исследовании.

При визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением при 2,5-кратном


увеличении внешняя поверхность эффективной длины устройства не имеет посторонних **включений**.

Внешняя поверхность эффективной длины устройства, включая дистальный кончик, свободна от технологических и **поверхностных дефектов и причиняет минимальное травмирование** сосудов во время использования.

Виден при **рентгеновском исследовании**.

Прочность на разрыв частей и соединений: $101.72 \pm 1.5H$

3. Расширитель сосудов

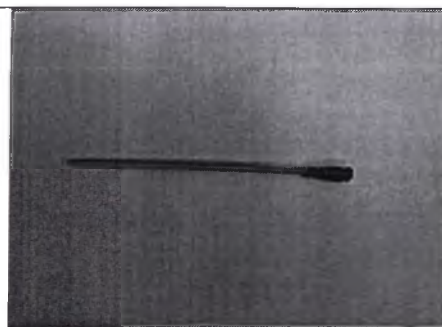

Размеры:

Раз-мер катетера	14G		16G		18G		20G		22G		8,5Fr		8Fr		7Fr		5,5Fr		5Fr		4,5Fr		4Fr	
Размер расширителя	8F	8.5F	6F	6.5F	5F	5.5F	4F	4.5F	4F	4.5F	9F	9.5F	9F	9.5F	8F	8.5F	6F	6.5F	6F	6.5F	6F	6.5F	5F или 6F*	5.5F или 6.5F*
внутр. Ø [мм] $\pm 0,01$ мм.	1,1	1,15	1,0	1,05	0,95	1,0	0,8	0,85	0,8	0,85	1,2	1,25	1,2	1,25	1,1	1,15	1,0	1,05	1,1	1,05	1,1	1,05	0,95	1,0
внешн. Ø [мм] $\pm 0,02$ мм.	2,7	2,72	2,0	2,2	1,67	1,85	1,4	1,5	1,4	1,5	3,0	3,17	3,0	3,17	2,7	2,83	2,0	2,2	2,0	2,16	2,0	2,16	1,67	1,83
Длина [см]	6		6		6		5		5		10		10		10		10		7		7		6 или 7*	
Отклонение от длины $\pm$ [см]	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	

* для набора FV-342906 и FC-346906

При визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением при 2,5-кратном увеличении внешняя поверхность эффективной длины устройства **не имеет посторонних включений**.

Внешняя поверхность эффективной длины устройства, включая дистальный кончик, **свободна от технологических и поверхностных дефектов и причиняет минимальное травмирование** сосудов во время использования.

Расширитель при определенной гибкости обладает **достаточной жесткостью**, чтобы расширить окно кровеносного сосуда, в который он вводится чрескожно.

Прочность на разрыв частей и соединений:


Минимальный наружный диаметр, мм	Минимальная сила разрыва, Н
$\geq 0.550 \sim < 0.750$	3
$\geq 0.750 \sim < 1.150$	5
$\geq 1.150 \sim < 1.850$	10
≥ 1.850	15

4. Игла проводниковая прямая
Или Y-образная

Игла проводниковая прямая



Игла проводниковая Y-образная

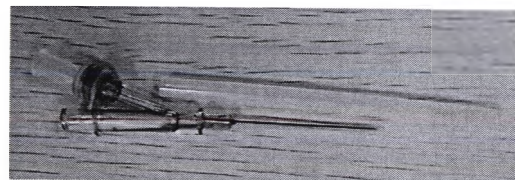

Размеры:

Раз-мер катетера	14G	16G	18G	20G	22G	8,5Fr	8Fr	7Fr	5,5Fr	5Fr	4,5Fr	4Fr
размер проводниковой иглы	18G	18G	19G	20G	20G	18G	18G	18G	20G	20G	20G	20G (18G)*
внешн. Ø [мм]	1.3	1.3	1.04	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	0.9	0.9	0.9	0.9
внутр. Ø [мм]	1.06	1.06	0.74	0.68	0.68	1.06	1.06	1.06	0.68	0.68	0.68	0.68
Длина [мм]	65	65	38	33	33	65	65	65	33	33	33	33

		<table><tr><td>Скорость потока, мл./мин</td><td>25~3 5</td><td>25~3 5</td><td>35~55</td><td>15~25</td><td>15~25</td><td>25~3 5</td><td>25~3 5</td><td>25~35</td><td>15~25</td><td>15~25</td><td>15~25</td><td>20~30</td></tr></table> для наборов FV-342906 и FC-346906 При визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением при 2,5-кратном увеличении внешняя поверхность эффективной длины устройства не имеет посторонних включений Внешняя поверхность эффективной длины устройства, включая дистальный кончик, свободна от технологических и поверхностных дефектов и причиняет минимальное травмирование сосудов во время использования. Видна при рентгеновском исследовании Острые иглы не имеет неровных краев, кромок, заусенцев и должно быть защищено от повреждений <i>Допустимое отклонение</i> Внутренний диаметр: 0,01 мм Внешний диаметр: 0,01 мм Длина: 3% Прочность соединения трубки иглы и соединительной втулки иглы: не менее 20 Н Цвет головки иглы: фиолетовый	Скорость потока, мл./мин	25~3 5	25~3 5	35~55	15~25	15~25	25~3 5	25~3 5	25~35	15~25	15~25	15~25	20~30
Скорость потока, мл./мин	25~3 5	25~3 5	35~55	15~25	15~25	25~3 5	25~3 5	25~35	15~25	15~25	15~25	20~30			
5.	Зажим	 Размеры: 9,5 x 25,5 x 1,7 мм ± 0,01 мм													
6.	Зажим для катетера	 Габаритные размеры: 21×12×1.6±0.01 мм Выдерживает давление в катетере 300 кПа в течение 30 с, не допуская протечек													

7.	Игла инъекционная 22G длиной 17 мм	Диаметр иглы $0,8 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$ Длина трубки $17 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$ Цвет головки иглы: черный Предохранительный колпачок иглы изготовлен из бесцветного материала Острие иглы острое, без заусенцев при осмотре с 2,5-кратным увеличением. Угол заточки иглы обычно имеет срез под углом $(11 \pm 2)^\circ$ Скорость потока воды через иглу: 8- 10 мл/мин Соединение головки иглы и трубки не разрушается под действием силы менее 22 Н, прикладываемой к трубке и головке в направлении их разъединения - инъекционное усилие: не менее $0.85H \pm 0.1H$ - радиус притупления: не более 0.03 мм - прочность на изгиб: $10 \text{ Н} \pm 0.1 \text{ Н}$ - прочность на излом: $65 \text{ Н} \pm 1 \text{ Н}$ - твердость: $5687.5 \text{ Н/мм}^2 \pm 14\%$ - шероховатость: $1.25 \pm 0.03 \text{ мкм}$ - изделие устойчиво к коррозии - Изделие устойчиво к коррозии . - внешняя поверхность трубки гладкая и не имеет дефектов.
----	------------------------------------	---

8. Шприц для введения 5 мл



Габаритные размеры: $\varnothing \times$ длина: $\varnothing 14,42-14,6$ мм, длина $196,5 \text{ мм} \pm 5\%$

Объем шприца (номинальный): 5 мл

Градуйрованная вместимость: 5 мл

Длина цилиндра: $78 \text{ мм} \pm 0.05 \text{ мм}$

Открытый конец цилиндра имеет **упоры для пальцев**, обеспечивающие шприцу устойчивость и удерживающие его от скатывания и оборота вокруг собственной оси больше чем на 180° при размещении его шкалой вверх на плоской поверхности, расположенной под углом 10° к горизонтали.



Длина выступания штока не менее 12,5 мм.

Положение наконечника на конце цилиндра: эксцентрично

Диаметр центрального отверстия наконечника не менее 1,2 мм.


Данное изделие соответствует следующим значениям:

Номинальн ая вместим ость шприца	Допуски на градуированную вместимость		Макси- мальное "мертвое" прост- ранство, мл	Общая длина шкалы до отметки номи- нальной вмести- м сти, не менее, мм	Деле- ние шкалы, мл	Вмес- тимость между линиями градуи- ровки с чис- ами, мл	Усилие при испытаниях на герметичность (см. приложение D)	
	Меньше половины номинально й вместимости	Равно или больше половины номинальной вместимости					Боко- вое усилие ($\pm 5\%$), Н	Аксиаль- ное давление ($\pm 5\%$), кПа
5 мл	$\pm(1,5\%$ от +1% слитого	$\pm 4\%$ слитого объема)	0,075	36	0,5	1	2,0	300

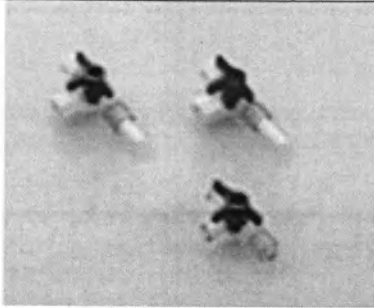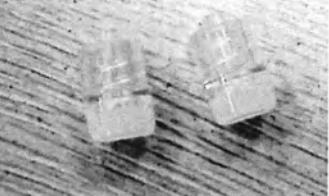		объема)							
		Скорость потока: 427мл./мин.±10% Шприц является воздухо- и водонепроницаемым.							
9.	Трехходовой кран	 Скорость потока с допустимыми отклонениями: 13мл/с ± 1мл/с Габаритные размеры (Д×Ш×В) 5,49*1,84*1,25см ±0,005см Скорость потока: не менее 357.0 мл/мин							
10.	Разъем иглы положительного давления свободный	 Габаритные размеры Ø × длина: 1,2 × 3,62см (± 0,002см)							
11.	Разъем иглы отрицательного давления свободный	 Габаритные размеры Ø × длина: 1,25×2,448см (± 0,002 см)							
12.	Заглушка инъекционная								


		Габаритные размеры: Ø × длина: 17×9мм (±0,02мм)																												
13.	Шприц, объемом 5 мл;	Габаритные размеры: Ø 13.62-14.3мм, длина 180.36 мм±5% Объем шприца (номинальный): 5 мл Градуированная вместимость: 5 мл Длина цилиндра: 76 мм ± 0,05мм Открытый конец цилиндра имеет упоры для пальцев, обеспечивающие шприцу устойчивость и удерживающие его от скатывания и оборота вокруг собственной оси больше чем на 180° при размещении его шкалой вверх на плоской поверхности, расположенной под углом 10° к горизонтали. Длина выступания штока не менее 12,5 мм. Положение наконечника на конце цилиндра: эксцентрично Диаметр центрального отверстия наконечника не менее 1,2 мм. Данному изделию соответствуют следующие параметры: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Номинальная вместимость шприца 5, мл</th><th colspan="2">Допуски на градуированную вместимость</th><th rowspan="2">Макси- мальное "мертвое" прост- ранство, мл</th><th rowspan="2">Общая длина шкалы до отметки номи- нальной вмести- мости, не ме ее, мм</th><th rowspan="2">Деле- н е шкалы, мл</th><th rowspan="2">Вмес- тимост ь между линиями градуи- ровки с чис- лами, мл</th><th colspan="2">Усилие при испытаниях на герметичность (см. приложение D)</th></tr> <tr> <th>Меньше половины номинальной вместимости</th><th>Равно или больше половины номинальной вместимости</th><th>Боко- вое усилие (±5 %), Н</th><th>Аксиаль- ное давление (±5%), кПа</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td><td>±(1,5% от +1% слитого</td><td>±4% слитого объема)</td><td>0,075</td><td>36</td><td>0,5</td><td>1</td><td>2,0</td><td>300</td></tr> </tbody> </table>							Номинальная вместимость шприца 5, мл	Допуски на градуированную вместимость		Макси- мальное "мертвое" прост- ранство, мл	Общая длина шкалы до отметки номи- нальной вмести- мости, не ме ее, мм	Деле- н е шкалы, мл	Вмес- тимост ь между линиями градуи- ровки с чис- лами, мл	Усилие при испытаниях на герметичность (см. приложение D)		Меньше половины номинальной вместимости	Равно или больше половины номинальной вместимости	Боко- вое усилие (±5 %), Н	Аксиаль- ное давление (±5%), кПа	5	±(1,5% от +1% слитого	±4% слитого объема)	0,075	36	0,5	1	2,0	300
Номинальная вместимость шприца 5, мл	Допуски на градуированную вместимость		Макси- мальное "мертвое" прост- ранство, мл	Общая длина шкалы до отметки номи- нальной вмести- мости, не ме ее, мм	Деле- н е шкалы, мл	Вмес- тимост ь между линиями градуи- ровки с чис- лами, мл	Усилие при испытаниях на герметичность (см. приложение D)																							
	Меньше половины номинальной вместимости	Равно или больше половины номинальной вместимости					Боко- вое усилие (±5 %), Н	Аксиаль- ное давление (±5%), кПа																						
5	±(1,5% от +1% слитого	±4% слитого объема)	0,075	36	0,5	1	2,0	300																						

		объема)								
		Скорость потока с допустимыми отклонениями: 427 мл./мин. $\pm 10\%$ Шприц является воздухо- и водонепроницаемым.								
14.	Игла инъекционная 18G длиной 38 мм	 Наружный диаметр игл: 1,2~1,3 мм Длина: 38мм$\pm 0,5$мм Цветовой код розовый Предохранительный колпачок иглы изготовлен из бесцветного материала. - угол заточки: $(17 \pm 2)^\circ$ - Скорость потока воды через иглу: 8-10 мл/мин - радиус притупления: 0,03 мм $\pm 0,01$ мм - инъекционное усилие: 1,15 Н $\pm 0,1$ Н - шероховатость: Ra: $\leq 0,32$ мкм - твердость: 5687,5 Н/мм$^2 \pm 14\%$ - Соединение головки иглы и трубки не разрушается под действием силы менее 22 Н, прикладываемой к трубке и головке в направлении их разъединения - прочность на изгиб: 10 Н $\pm 0,1$ Н - прочность на излом: 65 Н ± 1 Н - Изделие устойчиво к коррозии.								
15.	Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами									

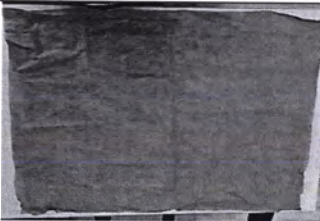		Тип: перчатки с прямыми пальцами Отделка: гладкая поверхность Перчатки герметичны. Усилие на разрыв, не менее: 12,5 Н Удлинение до разрыва, не менее: 700 % -- прочность до старения не менее 9.0 Н -- прочность после старения не менее 9.0 Н			
		Размер	Ширина, мм	Длина, мм, не менее	Толщина в местах измерения, мм, не менее
		7	89±5	270	0,10 - для гладких участков;
16.	Тампон хирургический 19×14 мм	 Габаритные размеры: 19×14 мм ± 2 мм			
17.	Простыня хирургическая 80×60 см	 Габаритные размеры: 80×60 см ± 0,5см - Водонепроницаемость: 30капель/см ² - прочность на разрыв во влажном состоянии: 45кПа±5кПа - прочность на разрыв в сухом состоянии: 45кПа±5кПа - прочность на растяжение во влажном состоянии: 25кПа±5кПа - прочность на разрыв в сухом состоянии: 25кПа±5кПа Водонепроницаемая.			

18.	Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см	 Габаритные размеры в сложенном состоянии: 8×10 см ± 0,03см - Водоупорность: 30капель/см² - прочность на разрыв во влажном состоянии: 45кПа±5кПа - прочность на разрыв в сухом состоянии: 45кПа±5кПа - прочность на растяжение во влажном состоянии: 25кПа±5кПа - прочность на разрыв в сухом состоянии: 25кПа±5кПа Водонепроницаемое
19.	Щетка стерильная	 Габаритные размеры: 13,5×3,5×0,5см, допустимое отклонение: 0,01 см
20.	Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев	 -габаритные размеры (Длина×Ширина×Высота): 69мм±1мм×49мм±1мм ×8слоев - влажность, капиллярность с допустимыми отклонениями: 70%±1% - разрывная нагрузка: • по основе: не менее 78,0 Н • по утку: не менее 36,0 Н - поверхностная плотность: не менее 36 г/м² - степень белизны: не менее 80 % - влажность: не более 8,5%

		- капиллярность: не менее 10 см/ч - степень белизны: не менее 80°
21.	Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм	 Габаритные размеры: Ø×длина: Ø 0.8 мм×L:55мм  Твердость иглы: не более 4900 Н/мм² Шероховатость: Ra не более 0,8 мкм На внутренних поверхностях ушек игл нет заусенцев, острых кромок, повреждающих или рвущих шовный материал при заведении нити в ушко или во время работы. Ширина режущих ребер игл: не более 0,033 мм. Наружная поверхность блестящая. Нет трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Острота колющей части иглы: 0,02мм Ширина режущих ребер игл с трехгранным и шпательным острием на длине от 2 до 5 диаметров хвостовика не превышает 0,025 мм. Игла не является атравматической - тип иглы: прямая, с трехгранным поперечным сечением. - размеры нити (Ø×длина): Ø 0.3±0.05mm×75cm - прочность крепления нити: ≥14.1Н - прочность шовного материала с допустимыми отклонениями: ≥4.5Н - тип шовного материала: шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный, - Цвет шовного материала: черный

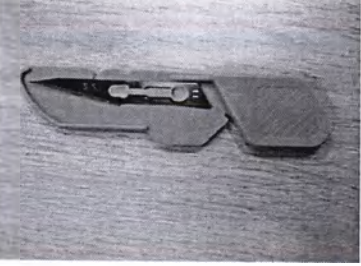22.	Раневая повязка 8×12 см	 Габаритные размеры: 8×12 см ±0,03см -Размеры адгезивного слоя (Длина×Ширина×Высота): 12см×8см×0.01см ±0.005см - Сопротивление отслаиванию липкого слоя: не менее 1 Н/см - Сорбционная емкость функциональной подушечки: 40капель/см² ±0.1 - Водонепроницаемость фиксирующего слоя: не менее 500 мм. водн. ст. - Степень адгезии к модели раневой поверхности: 30% ±1%
23.	Скальпель	 - Габаритные размеры с допустимыми отклонениями: 75×17×4 мм ± 0,1 мм - твердость: не менее 58.3 HRC - Шероховатость: не более 0,4 мкм режущая кромка : не более 0,8 мкм - Режущая кромка острая по всей длине и не имеет трещин, зазубрин и выкрошенных мест. - Ширина режущей кромки: не более 3 мкм

Техническая характеристика изделия.

Каталожный номер		Центральный венозный катетер					Размер просвета						Поток [мл/мин]			Проводник катетера проволочный		Расширитель сосудов ø × L	Игла проводни- ковая прямая или Y-образная
Набор базовый	Набор полный	К-во прос- ветов	Тип коннектора	Размер	L [см], 0.05 мм ± 0.05 %	Дистальный		Проксимальный		Медиальный*		Дисталь- ный	Проксималь- ный	Медиальный	ø × L (°×см) ± 0.05 %	ø × L (мм×см) ± 0.05 %			
						Размер	ø, [мм] ± 0,1 мм	Размер	ø, [мм] ± 0,1 мм	Размер	ø, [мм] ± 0,1 мм								
FV-1221	FV-1261	1	цилиндрический	22G	0,9	5	22G	0,9	-	-	-	-	15	-	-	0,018×50	0,46*50	4F×5 см или 4,5F×5 см	20G
FV-1222	FV-1262	1	цилиндрический	22G	0,9	8	22G	0,9	-	-	-	-	13	-	-	0,018×50	0,46*50	4F×5 см или 4,5F×5 см	20G
FV-1223	FV-1263	1	цилиндрический	22G	0,9	10	22G	0,9	-	-	-	-	10	-	-	0,018×50	0,46*50	4F×5 см или 4,5F×5 см	20G
FV-1224	FV-1264	1	цилиндрический	22G	0,9	13	22G	0,9	-	-	-	-	9	-	-	0,018×50	0,46*50	4F×5 см или 4,5F×5 см	20G
FV-1225	FV-1265	1	цилиндрический	22G	0,9	16	22G	0,9	-	-	-	-	9	-	-	0,018×50	0,46*50	4F×5 см или 4,5F×5 см	20G
FV-1226	FV-1266	1	цилиндрический	22G	0,9	20	22G	0,9	-	-	-	-	7	-	-	0,018×60	0,46*60	4F×5 см или 4,5F×5 см	20G
FV-1321	FV-1361	1	цилиндрический	20G	1,15	5	20G	1,15	-	-	-	-	20-35	-	-	0,021×50	0,53*50	4F×5 см или 4,5F×5 см	20G
FV-1322	FV-1362	1	цилиндрический	20G	1,15	8	20G	1,15	-	-	-	-	15-30	-	-	0,021×50	0,53*50	4F×5 см или 4,5F×5 см	20G
FV-1324	FV-1364	1	цилиндрический	20G	1,15	13	20G	1,15	-	-	-	-	15-25	-	-	0,021×50	0,53*50	4F×5 см или 4,5F×5 см	20G
FV-1325	FV-1365	1	цилиндрический	20G	1,15	16	20G	1,15	-	-	-	-	15-25	-	-	0,021×50	0,53*50	4F×5 см или 4,5F×5 см	20G
FV-1326	FV-1366	1	цилиндрический	20G	1,15	20	20G	1,15	-	-	-	-	15-25	-	-	0,021×60	0,53*60	4F×5 см или 4,5F×5 см	20G
FV-1421	FV-1461	1	цилиндрический	18G	1,4	5	18G	1,4	-	-	-	-	35-55	-	-	0,025×50	0,64*50	5F×6 см или 5,5F×6 см	19G
FV-1422	FV-1462	1	цилиндрический	18G	1,4	8	18G	1,4	-	-	-	-	30-50	-	-	0,025×50	0,64*50	5F×6 см или 5,5F×6 см	19G
FV-1424	FV-1464	1	цилиндрический	18G	1,4	13	18G	1,4	-	-	-	-	25-35	-	-	0,025×50	0,64*50	5F×6 см или 5,5F×6 см	19G
FV-1425	FV-1465	1	цилиндрический	18G	1,4	16	18G	1,4	-	-	-	-	25-35	-	-	0,025×50	0,64*50	5F×6 см или 5,5F×6 см	19G
FV-1426	FV-1466	1	цилиндрический	18G	1,4	20	18G	1,4	-	-	-	-	25-35	-	-	0,025×60	0,64*60	5F×6 см или 5,5F×6 см	19G
FV-1428	FV-1468	1	цилиндрический	18G	1,4	30	18G	1,4	-	-	-	-	20-30	-	-	0,025×70	0,64*70	5F×6 см или 5,5F×6 см	19G

Каталожный номер Набор базовый	Набор полный	Центральный венозный катетер					Размер просвета						Поток [мл/мин]			Проводник катетера проволочный		Расширитель сосудов ø × L	Игла проводни- ковая прямая или Y-образная
		К-во прос- ветов	Тип коннектора	Размер ø [мм]± 0,01 мм.	L [см], 0.05 мм ± 0.05 %	Дистальный		Проксимальный		Медиальный*		Дисталь- ный	Проксимал- ный	Медиальный					
						Размер	ø, [мм] ± 0,1 мм	Размер	ø, [мм] ± 0,1 мм	Размер	ø, [мм] ± 0,1 мм								
FV-1524	FV-1564	1	цилиндрический	16G	1,75	13	16G	1,75	-	-	-	-	45-65	-	-	0,032×50	0,81×50	6F×6 см или 6,5F×6 см	18G
FV-1525	FV-1565	1	цилиндрический	16G	1,75	16	16G	1,75	-	-	-	-	45-65	-	-	0,032×50	0,81×50	6F×6 см или 6,5F×6 см	18G
FV-1526	FV-1566	1	цилиндрический	16G	1,75	20	16G	1,75	-	-	-	-	40-60	-	-	0,032×60	0,81×60	6F×6 см или 6,5F×6 см	18G
FV-1528	FV-1568	1	цилиндрический	16G	1,75	30	16G	1,75	-	-	-	-	35-55	-	-	0,032×70	0,81×70	6F×6 см или 6,5F×6 см	18G
FV-1624	FV-1664	1	цилиндрический	14G	2,1	13	14G	2,1	-	-	-	-	90-125	-	-	0,032×50	0,81×50	8F×6 см или 8,5F×6 см	18G
FV-1625	FV-1665	1	цилиндрический	14G	2,1	16	14G	2,1	-	-	-	-	85-120	-	-	0,032×50	0,81×50	8F×6 см или 8,5F×6 см	18G
FV-1626	FV-1666	1	цилиндрический	14G	2,1	20	14G	2,1	-	-	-	-	70-110	-	-	0,032×60	0,81×60	8F×6 см или 8,5F×6 см	18G
FV-1628	FV-1668	1	цилиндрический	14G	2,1	30	14G	2,1	-	-	-	-	65-90	-	-	0,032×70	0,81×70	8F×6 см или 8,5F×6 см	18G
FV-2421	FV-2461	2	круглый	4Fr	1,33	5	22G	0,9	22G	0,5	-	-	15-30	10-20	-	0,018×50	0,46*50	5F×6 см или 5,5F×6 см	20G
FC-2421	-	2	треугольный		1,33	8	22G	0,9	22G	0,5	-	-	15-25	9-20	-	0,018×50	0,46*50	5F×6 см или 5,5F×6 см	20G
FV-2422	FV-2462	2	круглый	4Fr	1,33	13	22G	0,9	22G	0,5	-	-	8-25	8-20	-	0,018×50	0,46*50	5F×6 см или 5,5F×6 см	20G
FC-2422	-	2	треугольный		1,33	16	22G	0,9	22G	0,5	-	-	8-25	8-20	-	0,018×50	0,46*50	5F×6 см или 5,5F×6 см	20G
FV-2424	FV-2464	2	круглый	4Fr	1,33	20	22G	0,9	22G	0,5	-	-	8-20	8-15	-	0,018×60	0,46*60	5F×6 см или 5,5F×6 см	20G
FC-2424	-	2	треугольный		1,33	20	22G	0,9	22G	0,5	-	-	8-20	8-15	-	0,018×60	0,46*60	5F×6 см или 5,5F×6 см	20G
FV-2425	FV-2465	2	круглый	4Fr	1,33	16	22G	0,9	22G	0,5	-	-	8-25	8-20	-	0,018×50	0,46*50	5F×6 см или 5,5F×6 см	20G
FC-2425	-	2	треугольный		1,33	20	22G	0,9	22G	0,5	-	-	8-20	8-15	-	0,018×60	0,46*60	5F×6 см или 5,5F×6 см	20G
FV-2426	FV-2466	2	круглый	4Fr	1,33	20	22G	0,9	22G	0,5	-	-	8-20	8-15	-	0,018×60	0,46*60	5F×6 см или 5,5F×6 см	20G
FC-2426	-	2	треугольный		1,33	20	22G	0,9	22G	0,5	-	-	8-20	8-15	-	0,018×60	0,46*60	5F×6 см или 5,5F×6 см	20G
FV-2521	FV-2561	2	круглый	5Fr	1,67	5	18G	1,4	20G	0,3	-	-	30-50	15-35	-	0,021×50	0,53*50	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FC-2521	-	2	треугольный		1,67	8	18G	1,4	20G	0,3	-	-	25-45	15-30	-	0,021×50	0,53*50	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FV-2522	FV-2562	2	круглый	5Fr	1,67	13	18G	1,4	20G	0,3	-	-	20-35	10-25	-	0,021×50	0,53*50	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FC-2522	-	2	треугольный		1,67	16	18G	1,4	20G	0,3	-	-	20-35	10-25	-	0,021×50	0,53*50	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FV-2524	FV-2564	2	круглый	5Fr	1,67	20	18G	1,4	20G	0,3	-	-	20-30	10-20	-	0,021×60	0,53*60	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FC-2524	-	2	треугольный		1,67	20	18G	1,4	20G	0,3	-	-	20-30	10-20	-	0,021×60	0,53*60	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FV-2525	FV-2565	2	круглый	5Fr	1,67	16	18G	1,4	20G	0,3	-	-	20-35	10-25	-	0,021×50	0,53*50	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FC-2525	-	2	треугольный		1,67	16	18G	1,4	20G	0,3	-	-	20-35	10-25	-	0,021×50	0,53*50	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FV-2526	FV-2566	2	круглый	5Fr	1,67	20	18G	1,4	20G	0,3	-	-	20-30	10-20	-	0,021×60	0,53*60	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FC-2526	-	2	треугольный		1,67	20	18G	1,4	20G	0,3	-	-	20-30	10-20	-	0,021×60	0,53*60	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FV-2724	FV-2764	2	круглый	7Fr	2,3	13	14G	2,0	18G	0,4	-	-	75-100	25-40	-	0,035×50	0,89×50	8F×10 см или 8,5F×10 см	18G
FC-2724	-	2	треугольный		2,3	13	14G	2,0	18G	0,4	-	-	75-100	25-40	-	0,035×50	0,89×50	8F×10 см или 8,5F×10 см	18G

Каталожный номер		Центральный венозный катетер					Размер просвета					Поток [мл/мин]			Проводник катетера проволочный		Расширитель сосудов ø × L	Игла проводни- ковая прямая или Y-образная	
Набор базовый	Набор полный	К-во прос- ветов	Тип коннектора	Размер	ø [мм]± 0,01 мм.	L [см], 0,05 мм ± 0,05 %	Дистальный		Проксимальный		Медиальный*		Дисталь- ный	Проксималь- ный	Медиальный	ø × L (×см) ± 0,05 %			ø × L (мм×см) ± 0,05 %
							Размер	ø, [мм] ± 0,1 мм	Размер	ø, [мм] ± 0,1 мм	Размер	ø, [мм] ± 0,1 мм							
FV-2725	FV-2765	2	круглый	7Fr	2,3	16	14G	2.0	18G	0.4	-	-	75-100	25-40	-	0,035×50	0,89×50	8F×10см или 8,5F×10см	18G
FC-2725	-	2	треугольный				14G	2.0	18G	0.4	-	-							
FV-2726	FV-2766	2	круглый	7Fr	2,3	20	14G	2.0	18G	0.4	-	-	65-95	15-40	-	0,035×60	0,89×60	8F×10см или 8,5F×10см	18G
FC-2726	-	2	треугольный				14G	2.0	18G	0.4	-	-							
FV-2727	-	2	круглый	7Fr	2,3	25	14G	2.0	18G	0.4	-	-	65-95	15-40	-	0,035×60	0,89×60	8F×10см или 8,5F×10см	18G
FC-2727	FC-2767	2	треугольный				14G	2.0	18G	0.4	-	-							
FV-2728	FV-2768	2	круглый	7Fr	2,3	30	14G	2.0	18G	0.4	-	-	55-75	10-25	-	0,035×70	0,89×70	8F×10см или 8,5F×10см	18G
FC-2728	-	2	треугольный				14G	2.0	18G	0.4	-	-							
FV-2824	FV-2864	2	круглый	8Fr	2,7	13	14G	2.0	14G	0.7	-	-	80-115	80-110	-	0,035×50	0,89×50	9F×10см или 9,5F×10см	18G
FV-2825	FV-2865	2	круглый	8Fr	2,7	16	14G	2.0	14G	0.7	-	-	80-115	80-110	-	0,035×50	0,89×50	9F×10см или 9,5F×10см	18G
FV-2826	FV-2866	2	круглый	8Fr	2,7	20	14G	2.0	14G	0.7	-	-	75-100	70-100	-	0,035×60	0,89×60	9F×10см или 9,5F×10см	18G
FV-2828	FV-2868	2	круглый	8Fr	2,7	30	14G	2.0	14G	0.7	-	-	70-95	65-90	-	0,035×70	0,89×70	9F×10см или 9,5F×10см	18G
FV-2924	FV-2964	2	круглый	8.5Fr	2,85	13	14G	2.0	14G	0.85	-	-	75-120	70-110	-	0,035×50	0,89×50	9F×10см или 9,5F×10см	18G
FV-2925	FV-2965	2	круглый	8.5Fr	2,85	16	14G	2.0	14G	0.85	-	-	75-120	70-110	-	0,035×50	0,89×50	9F×10см или 9,5F×10см	18G
FV-2926	FV-2966	2	круглый	8.5Fr	2,85	20	14G	2.0	14G	0.85	-	-	65-110	50-100	-	0,035×60	0,89×60	9F×10см или 9,5F×10см	18G
FV-2928	FV-2968	2	круглый	8.5Fr	2,85	30	14G	2.0	14G	0.85	-	-	60-100	45-90	-	0,035×70	0,89×70	9F×10см или 9,5F×10см	18G
FV-3421	FV-3461	3	круглый	4,5 Fr	1.5	5	20G	1.15	23G	0.35	23G	0.35	25-35	10-15	10-15	0,021×50	0,53×50	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FV-3422	FV-3462	3	Круглый	4,5 Fr	1.5	8	20G	1.15	23G	0.35	23G	0.35	25-30	10-15	10-15	0,021×50	0,53×50	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FV-3424	FV-3464	3	Круглый	4,5 Fr	1.5	13	20G	1.15	23G	0.35	23G	0.35	20-25	9-13	9-13	0,021×50	0,53×50	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FV-3425	FV-3465	3	Круглый	4,5 Fr	1.5	16	20G	1.15	23G	0.35	23G	0.35	20-25	9-13	9-13	0,021×50	0,53×50	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FV-3426	FV-3466	3	Круглый	4,5 Fr	1.5	20	20G	1.15	23G	0.35	23G	0.35	18-22	8-12	8-12	0,021×60	0,53×60	6F×7 см или 6,5F×7 см	20G
FV-342906	-	3	Круглый	4Fr	1,33	6	20G	1.15	23G	0.35	23G	0.35	18-22	8-12	8-12	0,021×50	0,53×50	6F×7 см или 6,5F×7 см	18G
-	FC-346906	-	треугольный																
FC-3521	-	3	треугольный	5.5Fr	1.83	5	20G	1.15	22G	0.7	22G	0.7	30-50	10-20	10-20	0,021×50	0,53×50	6F×10 см или 6,5F×10 см	20G
FV-3521	FV-3561		Круглый																
FC-3522	-	3	треугольный	5.5Fr	1.83	8	20G	1.15	22G	0.7	22G	0.7	25-45	9-20	9-20	0,021×50	0,53×50	6F×10 см или	20G


Каталожный номер		Центральный венозный катетер					Размер просвета						Поток [мл/мин]			Проводник катетера проволочный		Расширитель сосудов ø × L	Игла проводни- ковая прямая или Y-образная
Набор базовый	Набор полный	К-во прос- ветов	Тип коннектора	Размер	ø [мм] ± 0,01 мм.	L [см], 0,05 мм ± 0,05 %	Дистальный		Проксимальный		Медиальный*		Дисталь- ный	Проксимал- ный	Медиаль- ный	ø × L (''×см) ± 0,05 %	ø × L (мм×см) ± 0,05 %		
FV-3522	FV-3562		Круглый															6,5F×10 см	
FC-3524	-	3	треугольный	5,5Fr	1,83	13	20G	1,15	22G	0,7	22G	0,7	20-40	8-18	8-18	0,021×50	0,53×50	6F×10 см или 6,5F×10 см	20G
FV-3524	FV-3564		Круглый																
FC-3525	-	3	треугольный	5,5Fr	1,83	16	20G	1,15	22G	0,7	22G	0,7	18-35	7-15	7-15	0,021×50	0,53×50	6F×10 см или 6,5F×10 см	20G
FV-3525	FV-3565		Круглый																
FC-3526	-	3	треугольный	5,5Fr	1,83	20	20G	1,15	22G	0,7	22G	0,7	15-30	7-12	7-12	0,021×60	0,53×60	6F×10 см или 6,5F×10 см	20G
FV-3526	FV-3566		Круглый																
FC-3724	-	3	треугольный	7Fr	2,3	13	16G	1,75	18G	0,65	18G	0,65	15-25	7-10	7-10	0,035×50	0,89×50	8F×10 см или 8,5F×10 см	18G
FV-3724	FV-3764		Круглый																
FC-3725	-	3	треугольный	7Fr	2,3	16	16G	1,75	18G	0,65	18G	0,65	55-75	15-30	15-30	0,035×50	0,89×50	8F×10 см или 8,5F×10 см	18G
FV-3725	FV-3765		Круглый																
FC-3726	-	3	треугольный	7Fr	2,3	20	16G	1,75	18G	0,65	18G	0,65	40-65	15-30	15-30	0,035×60	0,89×60	8F×10 см или 8,5F×10 см	18G
FV-3726	FV-3766		Круглый																
FC-3728	-	3	треугольный	7Fr	2,3	30	16G	1,75	18G	0,65	18G	0,65	35-60	15-25	15-25	0,035×70	0,89×70	8F×10 см или 8,5F×10 см	18G
FV-3728	FV-3768		Круглый																
FV-3727	FV-3767	3	Круглый	7Fr	2,3	25	16G	1,75	18G	0,65	18G	0,65	35-45	15-20	15-20	0,035×60	0,87×60	8F×10 см или 8,5F×10 см	18G
FC-3727	-		треугольный																
FV-4924	FV-4964	4	круглый	8,5Fr	2,85	13	14G	2,0	16G	0,57	18G	0,57	45-85	75-110	75-110	0,035×50	0,89×50	9F×10 см или 9,5F×10 см	18G
FV-4925	FV-4965	4	круглый	8,5Fr	2,85	16	14G	2,0	16G	0,57	18G	0,57	40-80	65-105	20-50	0,035×50	0,89×50	9F×10 см или 9,5F×10 см	18G
FV-4926	FV-4966	4	круглый	8,5Fr	2,85	20	14G	2,0	16G	0,57	18G	0,57	40-75	60-100	20-40	0,035×60	0,89×60	9F×10 см или 9,5F×10 см	18G
FV-4928	FV-4968	4	круглый	8,5Fr	2,85	30	14G	2,0	16G	0,57	18G	0,57	35-65	55-90	20-35	0,035×70	0,89×70	9F×10 см или 9,5F×10 см	18G

* у четырехпросветного катетера имеется два медиальных просвета.

Массы наборов.

Каталожный №	Масса набора, г, ±5%	Каталожный №	Масса набора, г, ±5%
FV-1221	44.89	FV-1261	98.21
FV-1222	44.92	FV-1262	99.37
FV-1223	44.94	FV-1263	99.94
FV-1224	44.96	FV-1264	99.96
FV-1225	45.01	FV-1265	101.02
FV-1226	45.02	FV-1266	101.04
FV-1321	45.23	FV-1361	102.05
FV-1322	45.26	FV-1362	102.22
FV-1324	45.27	FV-1364	102.25
FV-1325	45.32	FV-1365	102.47
FV-1326	45.36	FV-1366	102.53
FV-1421	46.01	FV-1461	103.01
FV-1422	46.06	FV-1462	103.12
FV-1424	46.07	FV-1464	103.15
FV-1425	46.09	FV-1465	103.19
FV-1426	46.12	FV-1466	104.23
FV-1428	46.23	FV-1468	104.46
FV-1524	46.45	FV-1564	104.79
FV-1525	46.46	FV-1565	105.02
FV-1526	46.53	FV-1566	105.23
FV-1528	46.57	FV-1568	105.37
FV-1624	47.59	FV-1664	105.68
FV-1625	47.61	FV-1665	105.78
FV-1626	47.65	FV-1666	105.79
FV-1628	47.74	FV-1668	106.11
FV-2421	48.01	FV-2461	106.48
FC-2421	48.05	-	-
FV-2422	48.13	FV-2462	106.67
FC-2422	48.19	-	-
FV-2424	48.27	FV-2464	106.99
FC-2424	48.36	-	-
FV-2425	49.45	FV-2465	107.09
FC-2425	49.51	-	-
FV-2426	49.61	FV-2466	107.23
FC-2426	49.73	-	-
FV-2521	50.01	FV-2561	107.45
FC-2521	50.11	-	-
FV-2522	50.17	FV-2562	107.57
FC-2522	50.23	-	-
FV-2524	50.27	FV-2564	107.61
FC-2524	50.31	-	-
FV-2525	50.34	FV-2565	107.69
FC-2525	50.42	-	-
FV-2526	50.51	FV-2566	107.71
FC-2526	50.56	-	-
FV-2724	50.59	FV-2764	107.79
FC-2724	50.61	-	-
FV-2725	50.63	FV-2765	107.82
FC-2725	50.68	-	-
FV-2726	50.72	FV-2766	107.88
FC-2726	50.78	-	-
FV-2727	50.83	-	-
FC-2727	50.86	FC-2767	108.11
FV-2728	50.91	FV-2768	108.18
FC-2728	50.93	-	-
FV-2824	51.11	FV-2864	108.23

FV-2825	51.19	FV-2865	108.29
FV-2826	51.22	FV-2866	108.31
FV-2828	51.35	FV-2868	108.33
FV-2924	51.41	FV-2964	108.41
FV-2925	51.51	FV-2965	108.42
FV-2926	52.11	FV-2966	108.47
FV-2928	52.19	FV-2968	108.51
FV-3421	53.11	FV-3461	108.67
FV-3422	53.18	FV-3462	108.73
FV-3424	53.24	FV-3464	108.79
FV-3425	53.29	FV-3465	108.81
FV-3426	54.31	FV-3466	108.87
FV-342906	54.33		
-		FC-346906	108.91
FC-3521	54.41	-	
FV-3521	54.56	FV-3561	109.03
FC-3522	54.61	-	
FV-3522	54.71	FV-3562	109.12
FC-3524	54.81	-	
FV-3524	55.01	FV-3564	109.21
FC-3525	55.09	-	
FV-3525	55.13	FV-3565	109.34
FC-3526	55.19	-	
FV-3526	55.45	FV-3566	109.48
FC-3724	55.51	-	
FV-3724	55.61	FV-3764	109.61
FC-3725	55.71	-	
FV-3725	55.81	FV-3765	110.03
FC-3726	55.91	-	
FV-3726	56.01	FV-3766	110.19
FC-3728	56.09	-	
FV-3728	56.12	FV-3768	110.31
FV-3727	56.21	FV-3767	110.41
FC-3727	56.31	-	

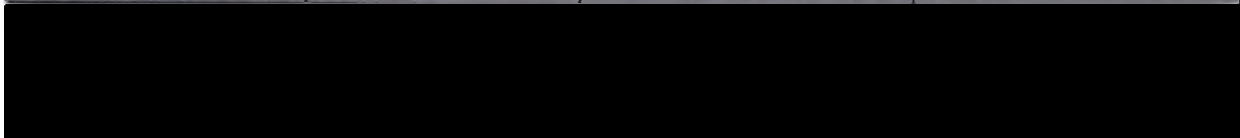

Биосовместимость: информация обо всех применяемых материалах изделия

Наименование изделия	Составные части	Материал изготовления/Марка	Производитель
Центральный венозный катетер	Катетер Наконечник Коннектор Удлинительная трубка	Термопластичный полиуретан (J560S)	LOTTE Chemical Corp.
	Зажим	АБС (Акрилонитрилбутадиенстирол) (AF312)	TORAY PLASTIC
Проводник катетера проволочный	Колпачок Переходник Защитная трубка Фиксатор защитной трубки	Полипропилен (R370Y),	RELIANCE / IOC
	Проводник	Нержавеющая сталь (AISI 304)	Xylem company
Расширитель сосудов	Коннектор Расширитель Защитная трубка	Полипропилен (R370Y)	RELIANCE / IOC
- Игла проводниковая прямая или игла проводниковая Y-образная	Коннектор	Поликарбонат (Makrolon Rx 1805),	Covestro Deutschland AG
	Игла	Нержавеющая сталь (AISI 304),	Xylem company
	Колпачок	Полиэтилен (Bormed LE6607-PH)	Borealis AG
- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - Игла инъекционная 18G длиной 38 мм	Коннектор	Поликарбонат (Makrolon Rx 1805),	Covestro Deutschland AG
	Игла	Нержавеющая сталь (AISI 304),	Xylem company
	Колпачок	Полиэтилен (Bormed LE6607-PH)	Borealis AG
- Зажим - Зажим для катетера	-	Поливинилхлорид (DBU8500)	FENO PLAST / RAJAT VINYL
Шприц для введения 5 мл Шприц, объемом 5мл	Толкатель клапана	АБС (Акрилонитрилбутадиенстирол) (AF312)	TORAY PLASTIC
	Корпус	Полипропилен (R370Y),	RELIANCE / IOC
	Плунжер	Силиконовый каучук (SILICONE MED14-4765)	NuSil Technology LLC

Заглушка инъекционная	Корпус	Поликарбонат (Makrolon Rx 1805),	Covestro Deutschland AG
	Заглушка	Силиконовый каучук (SILICONE MED14-4765)	NuSil Technology LLC
Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами	-	Полиизопреновый каучук (Cariflex IR)	Kraton Polymers US LLC
Тампон хирургический 19×14 мм	-	Марля (Хлопок класса А 100%)	Shenzhen PurCotton Co., Ltd.
Салфетка марлевая 69мм×49мм×8 слоев	-	Марля (Хлопок класса А 100%)	Shenzhen PurCotton Co., Ltd.
Простыня хирургическая 80×60 см	-	Нетканый материал (Вискозное иглопробивное полотно, производства Norafin Industries GmbH)	Norafin Industries GmbH
Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см	-	Бумага (Целлюлоза) (CAS # 9004-34-6)	Shenzhen PurCotton Co., Ltd.
Щетка стерильная	Рукоятка	АБС (Акрилонитрилбутадиенстирол) (AF312)	TORAY PLASTIC
	Головка	Пенополиуретан (Rynel)	Rynel Inc.
Шовный материал шёлковый, нерассасываю- щийся, многофиламен- тный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55мм	Игла	Нержавеющая сталь (AISI 304),	Xylem company
	Шовный материал	Шелк (Фиброин волокон шелка-сырца), Краситель (Экстракт кампешового дерева, цветной индекс 75290)	Shenzhen PurCotton Co
Раневая повязка 8×12 см	-	Полиуретан (Rynel)	Rynel Inc.
Скальпель	Рукоятка	Поливинилхлорид (DBU-8500),	FENO PLAST / RAJAT VINYL
	Лезвие	Нержавеющая сталь (AISI 304)	Xylem company
Трехходовой	Корпус	Поликарбонат (Makrolon Rx	Covestro Deutschland AG

кран		1805)	
	Кран Колпачок	Полипропилен (R370Y)	RELIANCE / IOC
Разъем иглы положительного давления свободный	Основание	Поликарбонат (Makrolon Rx 1805), Краситель (Синий (M52151B18) Elian SAS)	Covestro Deutschland AG
	Клапан	Поликарбонат (Makrolon Rx1805)	Covestro Deutschland AG
	Пружина	Краситель Желтый (30- 611025) Lifocolor	Xylem company
Разъем иглы отрицательного давления свободный	Корпус	Нержавеющая сталь (AISI 304)	Xylem company
	Клапан	Силиконовый каучук (SILICONE MED14-4765)	NuSil Technology LLC

Стандарты

№	Код	Название
1	MDD 93/42/EEC Amd by 2007/47/EC	Директива Совета ЕС 93/42/EEC о медицинских приборах, устройствах, оборудовании
2	MEDDEV 2.12-1 rev 8 Jan-2013	Руководящие указания по системе надзора за медицинскими изделиями
3	MEDDEV 2.12-2 rev 2 Jan 2012	Руководящие указания по пост-продажному клиническому наблюдению
4	MEDDEV 2.7.1 rev 3 Dec 2009	Клиническая оценка: Руководство для производителей и уполномоченных органов
5	EN 980:2008	Медицинские приборы. Графические символы, используемые при маркировке медицинских устройств
6	EN 1041:2008	Информация, предоставляемая изготовителем для медицинских приборов
7	EN 1707:1996	Фитинги конические с конусностью 6% (Люэра) для шприцев, игл и другого медицинского оборудования. Часть 2: Блокирующие фиттинги;
8	EN 20594- 1:1993/A1:1997	Фитинги конические с конусностью 6% (Люэра) для шприцев, игл и другого медицинского оборудования. Часть 1. Общие требования, включая дополнение A1:1997
9	ISO 7864:1993	Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения, ред. 3; (CEN EN ISO 7864:1995)
10	ISO 7886- 1:1993/Cor 1:1995	Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 1: Шприцы для ручного использования Ред. 1; Заменяет ISO 7886; Поправка 1-1995
11	ISO 8536- 4:2010/Amd1:2013	Аппараты медицинские для вливания. Часть 4. Комплекты для вливания одноразового применения с подачей самотеком
12	ISO 9626:1991/Amd 1:2001	Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских приборов; (CEN EN ISO 9626 :1995)
13	ISO 10282:2014	Перчатки хирургические резиновые стерильные одноразовые. Спецификация

№	Код	Название
14	EN ISO10555-1:2009	Катетеры сосудистые стерильные одноразового применения. Часть 1. Общие требования (ISO 10555-1:1995, включая дополнение 1:1999 и дополнение 2:2004)
15	ISO 10555-3:2013	Сосудистые катетеры. Стерильные и одноразовые катетеры. Часть 3. Центральные венозные катетеры
16	EN ISO 10993-1:2009/AC:2010	Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 1. Оценка и испытания
17	EN ISO 10993-3:2009	Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 3. Испытания на генотоксичность, канцерогенность и токсичность, влияющую на репродуктивность
18	EN ISO 10993-4:2009	Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 4. Выбор испытаний, относящихся к взаимодействию с кровью
19	EN ISO 10993-5:2009	Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 5. Испытания на цитотоксичность в пробирке
20	EN ISO 10993-6:2009	Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 6. Испытания для определения локальных эффектов после имплантации
21	EN ISO 10993-7:2008/AC:2009	Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 7. Остатки стерилизации оксидом этилена
22	ISO 10993-10:2010	Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 10. Пробы на раздражение и аллергическую реакцию кожи
23	EN ISO 10993-11:2009	Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 11. Испытания на общую токсичность
24	ISO 11070:1998	Интубаторы катетерные интраваскулярные стерильные одноразовые
25	EN ISO 11135-1:2007	Стерилизация медицинских изделий. Оксид этилена. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
26	EN ISO 11607-1:2009	Упаковка медицинских изделий, стерилизуемых на завершающей стадии производства. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам стерилизации и системам упаковки

№	Код	Название
27	EN ISO 11607-2:2006	Упаковка медицинских изделий, стерилизуемых на завершающей стадии производства. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки
28	EN ISO 14971:2012	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
29	EN ISO 11737-1:2006	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продуктах
30	EN ISO 11737-2:2009	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процесса стерилизации
31	GB/T 14233.1-2008	Методы испытания медицинского оборудования для инфузий, трансфузий и инъекций. Часть 1. Методы химического анализа
32	YY 0033-2000	Стандарты GMP для стерильных медицинских изделий
33	YY 0166-2002	Хирургические иглы с нитью
34	YY 0330-2002	Хлопок медицинский очищенный
35	YY 0331-2006	Марля медицинская очищенная

2. Используемые согласованные стандарты (Выдержка из Официального бюллетеня - OJ C 014 от 16.01.2015)

ESO	Ссылка и название согласованного стандарта (и ссылочного документа)	Ссылка на выведенный из употребления стандарт	Дата окончания презумпции соответствия выведенного из употребления стандарта
CEN	EN 980:2008 Медицинские приборы. Графические символы, используемые при маркировке медицинских устройств	EN 980:2003	21.03.2010
CEN	EN 1041:2008 Информация, предоставляемая изготовителем для медицинских приборов	EN 1041:1998	31.08.2011

ESO	Ссылка и название согласованного стандарта (и ссылочного документа)	Ссылка на выведенный из употребления стандарт	Дата окончания презумпции соответствия выведенного из употребления стандарта
CEN	EN ISO 10555-1:2009 Катетеры сосудистые стерильные одноразового применения. Часть 1. Общие требования (ISO 10555-1:1995, включая дополнение 1:1999 и дополнение 2:2004)	EN ISO 10555-1:1996	21.03.2010
CEN	EN ISO 10993-1:2009/AC:2010 Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 1: Оценка и испытания в рамках процесса менеджмента риска	EN ISO 10993-1:2009	21.03.2010
CEN	EN ISO 10993-3:2009 Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 3. Испытания на генотоксичность, канцерогенность и токсичность, влияющую на репродуктивность (ISO 10993-3:2003)	EN ISO 10993-3:2003	21.03.2010
CEN	EN ISO 10993-4:2009 Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 4. Выбор испытаний, относящихся к взаимодействию с кровью (ISO 10993-4:2002, включая дополнение 1:2006)	EN ISO 10993-4:2002	21.03.2010
CEN	EN ISO 10993-5:2009 Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 5. Испытания на цитотоксичность в пробирке (ISO 10993-5:2009)	EN ISO 10993-5:1999	21.03.2010

ESO	Ссылка и название согласованного стандарта (и ссылочного документа)	Ссылка на выведенный из употребления стандарт	Дата окончания презумпции соответствия выведенного из употребления стандарта
CEN	EN ISO 10993-6:2009 Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 6. Испытания для определения локальных эффектов после имплантации (ISO 10993-6:2007)	EN ISO 10993-6:2007	21.03.2010
CEN	EN ISO 10993-7:2008 Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 7. Остатки стерилизации оксидом этилена (ISO 10993-7:2008)		
CEN	EN ISO 10993-9:2009 Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 9. Структура идентификации и квантификации потенциальных продуктов разложения (ISO 10993-9:1999)	EN ISO 10993-9:1999	21.03.2010
CEN	EN ISO 10993-11:2009 Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 11. Испытания на системную токсичность (ISO 10993-11:2006)	EN ISO 10993-11:2006	21.03.2010
CEN	EN ISO 11135-1:2007 Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий (ISO 11135:2007)	EN 550:1994	31.05.2010

ESO	Ссылка и название согласованного стандарта (и ссылоного документа)	Ссылка на выведенный из употребления стандарт	Дата окончания презумпции соответствия выведенного из употребления стандарта
CEN	EN ISO 11607-1:2009 Упаковка медицинских изделий, стерилизуемых на завершающей стадии производства. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам (ISO 11607-1:2006)	EN ISO 11607-1:2006	21.03.2010
CEN	EN ISO 11607-2:2006 Упаковка медицинских изделий, стерилизуемых на завершающей стадии производства. Часть 2. Требования к оценке процессов формирования, герметизации и сборки (ISO 11607-2:2006)	/	/
CEN	EN ISO 14971:2012 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям	EN ISO 14971:2009	30.08.2012
CEN	EN ISO 11737-1:2006 Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продуктах	EN 1174-2:1996 EN 1174-1:1996 EN 1174-3:1996	31.10.2006
CEN	EN ISO 11737-2:2009 Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процесса стерилизации	/	/

Numbered, sewed and sealed in sheets in all.

Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.

Gao Fengyi Gao Fengyi
Vice president



Стр. 1

СЕРТИФИКАТ

/Логотип: Китайский комитет содействия развитию международной торговли (CCPIT)/

Китайский комитет содействия развитию международной торговли является
Международной торговой палатой Китая

Стр. 2

/Логотип: Китайский комитет содействия развитию международной торговли/

**Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Международная торговая палата Китая**

СЕРТИФИКАТ

/QR-код/
№ 194406B0/001691

*/Фрагмент печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли * Специальная печать для коммерческих документов * Сертификация (58)/*

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО печать компании «ГУАНДУН БАЙХЭ МЕДИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.» (GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.) на приложенном ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

*/Рельефный оттиск на самоклеящемся лейбле: Китайский комитет содействия развитию международной торговли * Специальная печать для коммерческих документов * Сертификация (58)/*

*/Печать: Китайский комитет содействия развитию международной торговли * Специальная печать для коммерческих документов * Сертификация (58)/*

Китайский комитет содействия развитию международной торговли

Подпись */Подпись/*
уполномоченного лица: Чэнь Син (Chen Xing)

Дата: 26 февраля 2019 г.

Стр. 3

/Логотип:
«Байхэ»/

«Гуандун Байхэ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.»
№ 89, Таоюань Ист Роуд, Нанхай, Фошань, 528225, провинция Гуандун, Китай
(No. 89, Taoyuan East Road, Nanhai, Foshan, 528225, Guangdong Province, China)
Тел. 86-757-81207300 Факс: 86-757-81207311
www.baihemedical.com/en/
Сайт: www.baihemedical.com/ch/
Адрес электронной почты: able@baihemedical.com

Кому: Росздравнадзор
От: «Гуандун Байхэ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.»

Направляем вам следующий документ для регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации:

Эксплуатационная документация для медицинского изделия **Набор для катетеризации центральных вен ABLE** на русском языке.

/Фрагмент печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли * Специальная печать для коммерческих документов * Сертификация (58)/

Дата выдачи: 13 февраля 2019 г.
Гао Фэнъи (Gao Fengyi), вице-президент
Подпись

/Подпись/
/Печать: «ГУАНДУН БАЙХЭ МЕДИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.»/

Стр. 4

/Наклейка: Пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 104 листа.
«Гуандун Байхэ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.»

Гао Фэнъи /Подпись/
Вице-президент/

/Печать: «ГУАНДУН БАЙХЭ
МЕДИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.»/

Перевод с китайского и английского языков на русский язык выполнил переводчик
Чинина Дарья Сергеевна

Российская Федерация
Город Москва
Четвертое сентября две тысячи девятнадцатого года

Я, Разгоняева Елена Владимировна, временно исполняющая обязанности
нотариуса города Москвы Кубасова Игоря Евгеньевича, свидетельствую
подлинность подписи переводчика Чининой Дарьи Сергеевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/293-н/77-2019- 10 - 280

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200
руб.



Е.В. Разгоняева
(инициалы, фамилия ВРИО нотариуса)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
2 106 2 лист(а)ов
ВРИО Нотариуса

