

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭксимКИП»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЭксимКИП»



Федосеев П.С.

«17» сентября 2018 г.

ПАСПОРТА
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Стекло для микропрепаратов «EximLab»
по ТУ 32.50.50-003-61554801-2017

(Версия 03)

Паспорт

«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 32.50.50-003-61554801-2017.
Варианты исполнения: Стекло предметное оптическое бесцветное СПОБ

1. Назначение

Для использования в целях сбора, сохранения, транспортировки, и/или физической защиты от механических повреждений диагностических образцов или мазков для анализа и/или других исследований.

2. Область применения

Стационарные, амбулаторные, лечебно-профилактические учреждения, лаборатории.

3. Показания

Для размещения, сохранения и/или транспортировки препаратов, мазков на поверхность для проведения микроаналитических исследований в клинично-диагностических, санитарно-гигиенических и других лабораториях.

4. Противопоказания

В случае использования изделий в соответствии с показаниями к применению, противопоказаний не выявлено.

5. Потенциальные пользователи

Медицинские работники.

6. Форма выпуска

Стекло предметное оптическое бесцветное СПОБ имеет прямоугольную форму. По способу изготовления различают стекло предметное оптическое бесцветное СПОБ: со шлифованными краями (СПОБ-7101); со шлифованными краями и полосой для записи (СПОБ-7105); без обработки (СПОБ-7102) – края стекла не обработаны.

7. Основные характеристики

- Изделия изготавливаются в нестерильном виде.
- Кратность применения: многократное применения.
- Линейные размеры и масса стекла представлены в таблице 1.

Таблица 1 (к рисункам 1,2)

Наименование изделия	Ширина (D), мм (пред. откл. ± 1 мм)	Длина (L), мм (пред. откл. ± 1 мм)	Толщина (H), мм	Масса, г, не более
Стекло предметное оптическое бесцветное СПОБ				
СПОБ-7101, со шлифованными краями	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7
СПОБ-7102, без обработки	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7
СПОБ-7105, со шлифованными краями и полосой для записи	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7

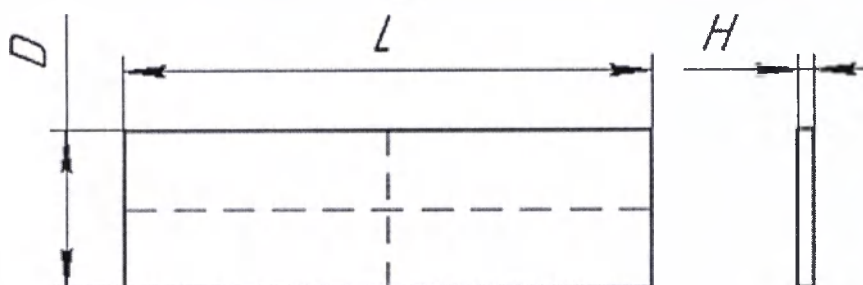


Рис. 1 – Стекло предметное оптическое бесцветное СПОБ (СПОБ-7101, со шлифованными краями; СПОБ-7102, без обработки)

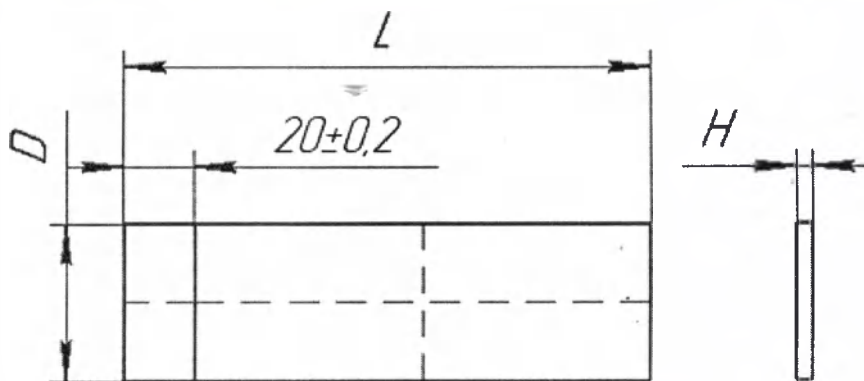


Рис.2 – Стекло предметное оптическое бесцветное СПОБ: СПОБ-7105, со шлифованными краями и полосой для записи

- Стекла для микропрепаратов при 20°C должны иметь: показатель преломления $n_D = 1,51 \pm 0,01$; коэффициент дисперсии $v = 60 \pm 2$.
- Стекло предметное оптическое бесцветное СПОБ должно обладать коэффициентом пропускания видимого света: 91,3-91,5%.
- Стекла для микропрепаратов должны быть химически устойчивыми к действию соляной кислоты и дистиллированной воды.
- Поверхность стекол для микропрепаратов должна быть гладкой, ровной. Волнистость поверхности не допускается.
- Стекла для микропрепаратов не должны содержать пузырей, камней, царапин и свилей.
- Стекла для микропрепаратов должны иметь притупление кромки. На кромке стекла допускаются выколки размером не более 0,2 мм.
- Допуск параллельности рабочих поверхностей стекол должен быть не более 0,03 мм.
- Допуск плоскостности рабочих поверхностей стекол должен быть не более 0,1 мм на длине 100 мм.
- Стекла для микропрепаратов должны изготавливаться из бесцветного силикатного стекла марки НС-1, НС-1А. Допускается слабо-голубой оттенок стекла.

8. Дезинфекция

- Изделия должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113.
- Стекла должны быть устойчивы к дезинфекциям с использованием физического метода. Перед дезинфекцией стекла должны быть очищены от органических загрязнений и промыты водопроводной водой.
- Стекла должны обеспечивать возможность их дезинфекции 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

9. Комплектность

Комплектность поставки

- изделие одного вида (исполнения), размера и партии;
- паспорт на изделие.

10. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

11. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

12. Требования к эксплуатации

Стекла для микропрепаратов при эксплуатации должны быть исправны при воздействии температуры $(+10 - +35) \pm 2$ °C и влажности $(80 - 100) \pm 2\%$ воздуха.

13. Транспортирование и хранение

- Транспортировка должна производиться в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующими на транспорте каждого вида правилами, утвержденными в установленном порядке.
- Условия транспортирования изделий в заводской упаковке предприятия - изготовителя - по группе Ж2 ГОСТ 15150.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в условиях хранения не менее 12 часов до использования.

- Условия хранения - по группе С ГОСТ 15150. При хранении изделия должны быть защищены от воздействия загрязнений, атмосферных осадков и химических испарений.
- Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий, защиту от загрязнений и атмосферных осадков при транспортировании и хранении

14. Сведения об утилизации

Использованные изделия утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Использованные изделия относятся к отходам класса Б по СанПиН 2.1.7.2790.

15. Гарантии производителя

- Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭксимКИП» (ООО «ЭксимКИП»), 141407, Московская обл., г. Химки, Нагорное ш., д. 2., корпус 7, пом.2
Тел.: +7(499) 703-02-43, E-mail: exim@eximlab.ru
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.50-003-61554801-2017 (устойчивость к действию соляной кислоты и дистиллированной воды; устойчивость к дезинфекции) при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

16. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Паспорт

«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 32.50.50-003-61554801-2017
Вариант исполнения: Стекло предметное, СПО с окошками

1. Назначение

Для использования в целях сбора, сохранения, транспортировки, и/или физической защиты от механических повреждений диагностических образцов или мазков для анализа и/или других исследований.

2. Область применения

Стационарные, амбулаторные, лечебно-профилактические учреждения, лаборатории.

3. Показания

Для микроскопии образцов способом «висячая капля», а также размещения, сохранения и/или транспортировки препаратов в клинико-диагностических, санитарно-гигиенических и других лабораториях.

4. Противопоказания

В случае использования изделий в соответствии с показаниями к применению, противопоказаний не выявлено.

5. Потенциальные пользователи

Медицинские работники.

6. Форма выпуска

Стекло предметное, СПО с окошками имеет прямоугольную форму, со шлифованными краями, матовой поверхностью и глянцевыми лунками. По способу изготовления различают стекло матовое для замешивания с пронумерованными 3-мя лунками (СПО-3), с 6-ю лунками (СПО-6), с 8-ю лунками (СПО-8). Форма лунок – круглая. Стекло предметное, СПО с окошками имеет отдельный сектор для записей прямоугольной формы.

7. Основные характеристики

- Изделия изготавливаются в нестерильном виде.
- Кратность применения: многократное применения.
- Линейные размеры и масса стекла представлены в таблице 1.

Таблица 1 (к рисункам 1,2,3)

Наименование изделия	Ширина (D), мм (пред. откл. ±1 мм)	Длина (L), мм (пред. откл. ±1 мм)	Толщина (H), мм	d, мм	a, мм (пред. откл. ±1 мм)	Масса, г, не более
Стекло предметное, СПО с окошками						
СПО-3	26	76	1±0,1	9	29,5	15
СПО-6	26	76	1±0,1	7	26,5	15
СПО-8	26	76	1±0,1	6	26	15

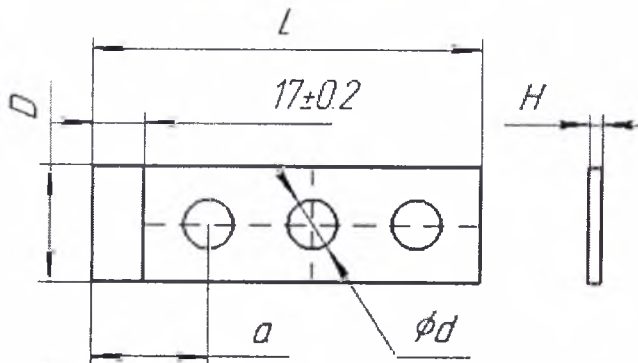


Рис.1 - Стекло предметное, СПО с окошками: СПО-3

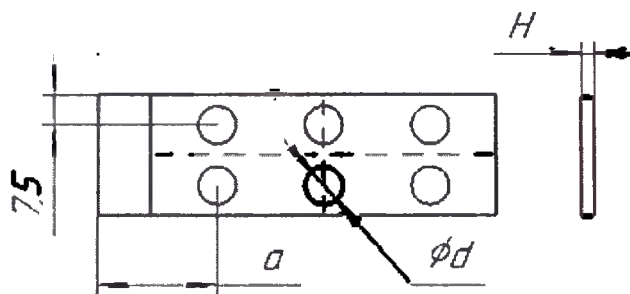


Рис.2 - Стекло предметное, СПО с окошками: СПО-6

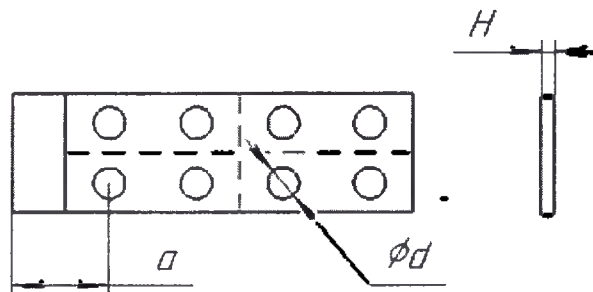


Рис.3- Стекло предметное, СПО с окошками: СПО-8

- Стекла для микропрепаратов при 20°С должны иметь:
-показатель преломления $n_D = 1,51 \pm 0,01$;
-коэффициент дисперсии $v = 60 \pm 2$.
- Стекла для микропрепаратов должны быть химически устойчивыми к действию соляной кислоты и дистиллированной воды.
- Поверхность стекол для микропрепаратов должна быть гладкой, ровной. Волнистость поверхности не допускается.
- Стекла для микропрепаратов не должны содержать пузырей, камней, царапин и свилей.
- Стекла для микропрепаратов должны иметь притупление кромки. На кромке стекла допускаются выколки размером не более 0,2 мм.
- Допуск параллельности рабочих поверхностей стекол должен быть не более 0,03 мм.
- Допуск плоскостности рабочих поверхностей стекол должен быть не более 0,1 мм на длине 100 мм.
- Стекла для микропрепаратов должны изготавливаться из бесцветного силикатного стекла марки НС-1, НС-1А. Допускается слабо-голубой оттенок стекла.

8. Дезинфекция

- Изделия должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113.
- Стекла должны быть устойчивы к дезинфекциям с использованием физического метода. Перед дезинфекцией стекла должны быть очищены от органических загрязнений и промыты водопроводной водой.
- Стекла должны обеспечивать возможность их дезинфекции 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

9. Комплектность

Комплектность поставки

- изделие одного вида (исполнения), размера и партии;
- паспорт на изделие.

10. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

11. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

12. Требования к эксплуатации

Стекла для микропрепаратов при эксплуатации должны быть исправны при воздействии температуры $(+10 - +35) \pm 2$ °С и влажности $(80 - 100) \pm 2\%$ воздуха.

13. Транспортирование и хранение

- Транспортировка должна производиться в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующими на транспорте каждого вида правилами, утвержденными в установленном порядке.
- Условия транспортирования изделий в заводской упаковке предприятия - изготовителя - по группе Ж2 ГОСТ 15150.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в условиях хранения не менее 12 часов до использования.
- Условия хранения - по группе С ГОСТ 15150. При хранении изделия должны быть защищены от воздействия загрязнений, атмосферных осадков и химических испарений.
- Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий, защиту от загрязнений и атмосферных осадков при транспортировании и хранении

14. Сведения об утилизации

Использованные изделия утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Использованные изделия относятся к отходам класса Б по СанПиН 2.1.7.2790.

15. Гарантии производителя

- Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭксимКИП» (ООО «ЭксимКИП»), 141407, Московская обл., г. Химки, Нагорное ш., д. 2., корпус 7, пом.2
Тел.: +7(499) 703-02-43, E-mail: exim@eximlab.ru
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.50-003-61554801-2017 (устойчивость к действию соляной кислоты и дистиллированной воды; устойчивость к дезинфекции) при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

16. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Паспорт

«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 32.50.50-003-61554801-2017.

Варианты исполнения: Стекло предметное, СО

1. Назначение

Для использования в целях сбора, сохранения, транспортировки, и/или физической защиты от механических повреждений диагностических образцов или мазков для анализа и/или других исследований.

2. Область применения

Стационарные, амбулаторные, лечебно-профилактические учреждения, лаборатории.

3. Показания

Для размещения, сохранения и/или транспортировки препаратов, мазков на поверхность для проведения микроаналитических исследований в клинико-диагностических, санитарно-гигиенических и других лабораториях.

4. Противопоказания

В случае использования изделий в соответствии с показаниями к применению, противопоказаний не выявлено.

5. Потенциальные пользователи

Медицинские работники.

6. Форма выпуска

Стекло предметное, СО имеет прямоугольную форму. По способу изготовления различают: стекло предметное со шлифованными краями и фаской для растяжки мазков (СО-2) со шлифованными краями (СО-3), с полосой для записи и шлифованными краями (СО-4); с односторонним матированием (СО-5).

7. Основные характеристики

- Изделия изготавливаются в нестерильном виде.
- Кратность применения: многократное применения.
- Линейные размеры и масса стекла представлены в таблице 1.

Таблица 1 (к рисункам 1,2)

Наименование изделия	Ширина (D), мм (пред. откл. ± 1 мм)	Длина (L), мм (пред. откл. ± 1 мм)	Толщина (H), мм	Масса, г, не более
Стекло предметное, СО				
СО-2, со шлифованными краями и фаской для растяжки мазков	26	76	$1 \pm 0,1$	15
СО-3, со шлифованными краями	26	76	$1 \pm 0,1$	15
СО-4, с полосой для записи и шлифованными краями	26	76	$1 \pm 0,1$	15
СО-5, с односторонним матированием	26	76	$1 \pm 0,1$	15

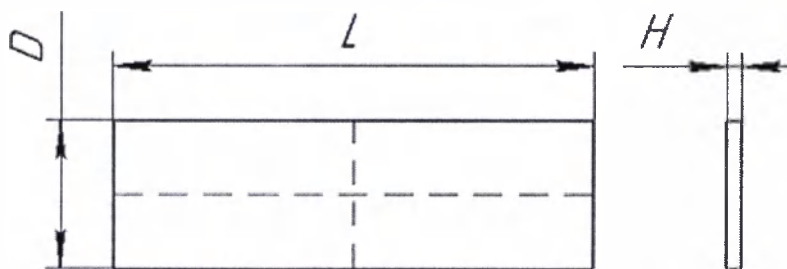


Рис.1- Стекло предметное, СО: СО-2, со шлифованными краями и фаской для растяжки мазков; СО-3, со шлифованными краями; СО-5, с односторонним матированием

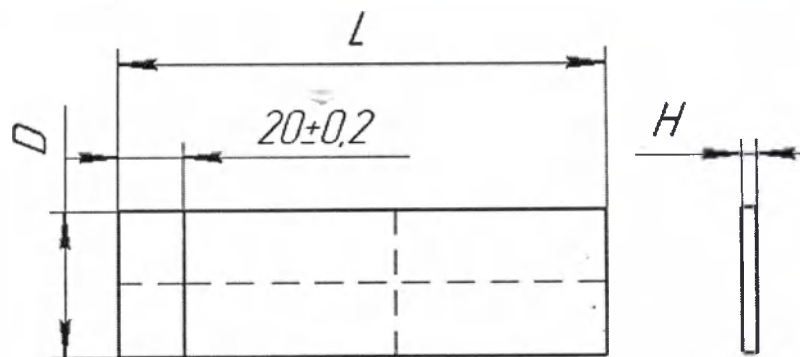


Рис.2- Стекло предметное, СО: СО-4, с полосой для записи и шлифованными краями

- Стекла для микропрепаратов при 20°C должны иметь:
-показатель преломления $n_D = 1,51 \pm 0,01$;
-коэффициент дисперсии $v = 60 \pm 2$.
- Стекла для микропрепаратов должны быть химически устойчивыми к действию соляной кислоты и дистиллированной воды.
- Поверхность стекол для микропрепаратов должна быть гладкой, ровной. Волнистость поверхности не допускается.
- Стекла для микропрепаратов не должны содержать пузырей, камней, царапин и свилей.
- Стекла для микропрепаратов должны иметь притупление кромки. На кромке стекла допускаются выколки размером не более 0,2 мм.
- Допуск параллельности рабочих поверхностей стекол должен быть не более 0,03 мм.
- Допуск плоскостности рабочих поверхностей стекол должен быть не более 0,1 мм на длине 100 мм.
- Стекла для микропрепаратов должны изготавливаться из бесцветного силикатного стекла марки НС-1, НС-1А. Допускается слабо-голубой оттенок стекла.

8. Дезинфекция

- Изделия должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113.
- Стекла должны быть устойчивы к дезинфекциям с использованием физического метода. Перед дезинфекцией стекла должны быть очищены от органических загрязнений и промыты водопроводной водой.
- Стекла должны обеспечивать возможность их дезинфекции 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

9. Комплектность

Комплектность поставки

- изделие одного вида (исполнения), размера и партии;
- паспорт на изделие.

10. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

11. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

12. Требования к эксплуатации

Стекла для микропрепаратов при эксплуатации должны быть исправны при воздействии температуры $(+10 - +35) \pm 2$ °C и влажности $(80 - 100) \pm 2\%$ воздуха.

13. Транспортирование и хранение

- Транспортировка должна производиться в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующими на транспорте каждого вида правилами, утвержденными в установленном порядке.
- Условия транспортирования изделий в заводской упаковке предприятия - изготовителя - по группе Ж2 ГОСТ 15150.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в условиях хранения не менее 12 часов до использования.
- Условия хранения - по группе С ГОСТ 15150. При хранении изделия должны быть защищены от воздействия загрязнений, атмосферных осадков и химических испарений.
- Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий, защиту от загрязнений и атмосферных осадков при транспортировании и хранении

14. Сведения об утилизации

Использованные изделия утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Использованные изделия относятся к отходам класса Б по СанПиН 2.1.7.2790.

15. Гарантии производителя

- Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭксимКИП» (ООО «ЭксимКИП»), 141407, Московская обл., г. Химки, Нагорное ш., д. 2., корпус 7, пом.2
Тел.: +7(499) 703-02-43, E-mail: exim@eximlab.ru
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.50-003-61554801-2017 (устойчивость к действию соляной кислоты и дистиллированной воды; устойчивость к дезинфекции) при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

16. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Паспорт

«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 32.50.50-003-61554801-2017.

Варианты исполнения: Стекло предметное, СП

1. Назначение

Для использования в целях сбора, сохранения, транспортировки, и/или физической защиты от механических повреждений диагностических образцов или мазков для анализа и/или других исследований.

2. Область применения

Стационарные, амбулаторные, лечебно-профилактические учреждения, лаборатории.

3. Показания

Для размещения, сохранения и/или транспортировки препаратов, мазков на поверхность для проведения микроаналитических исследований в клинико-диагностических, санитарно-гигиенических и других лабораториях.

4. Противопоказания

В случае использования изделий в соответствии с показаниями к применению, противопоказаний не выявлено.

5. Потенциальные пользователи

Медицинские работники.

6. Форма выпуска

Стекло предметное, СП имеет прямоугольную форму. По способу изготовления различают: стекло предметное с заточенным краем (СП-2 Люкс), с шлифованными краями (СП-7101); с нешлифованными краями (СП-7102), с 1-й лункой и шлифованными краями (СП-7103); с 3-мя лунками и шлифованными краями (СП-7103А); с 2-мя лунками и шлифованными краями (СП-7104), со шлифованными краями и полосой для записи (СП-7105), с полированными краями и цветной полосой для записи (СП-7109), с адгезивным покрытием, со шлифованными краями и полосой для записи (СП), с необработанными краями (СП), с односторонним матированием (СП-5).

7. Основные характеристики

- Изделия изготавливаются в нестерильном виде.
- Кратность применения: многократное применения.
- Линейные размеры и масса стекла представлены в таблице 1.

Таблица 1 (к рисункам 1,2,3,4,5)

Наименование изделия	Ширина (D), мм (пред. откл. ± 1 мм)	Длина (L), мм (пред. откл. ± 1 мм)	Толщина (H), мм	Масса, г, не более
Стекло предметное, СП				
СП-2 Люкс, с заточенным краем	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7
СП-7101 шлифованные края	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7
СП-7101 шлифованные края	26	76	$1,0 \pm 0,1$	15
СП-7102, нешлифованные края	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7
СП-7103, с 1-й лункой и шлифованными краями	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7
СП-7103А, с 3-мя лунками и шлифованными краями	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7
СП-7104, с 2-мя лунками и шлифованными краями	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7
СП-7105, со шлифованными краями и полосой для записи	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7
СП-7109, с полированными краями и цветной полосой для записи	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7
СП с адгезивным покрытием, со шлифованными краями и полосой для записи	26	76	$1,0 \pm 0,1$	7
СП с необработанными краями	26	46	$1,0 \pm 0,1$	6

Наименование изделия	Ширина (D), мм (пред. откл. ± 1 мм)	Длина (L), мм (пред. откл. ± 1 мм)	Толщина (H), мм	Масса, г, не более
СП с необработанными краями	26	76	$1,0 \pm 0,1$	15
СП с необработанными краями	60	80	$1,0 \pm 0,1$	15
СП с необработанными краями	80	100	$1,0 \pm 0,1$	17
СП с необработанными краями	90	120	$1,0 \pm 0,1$	20
СП-5 с односторонним матированием	26	76	$1,0 \pm 0,1$	15

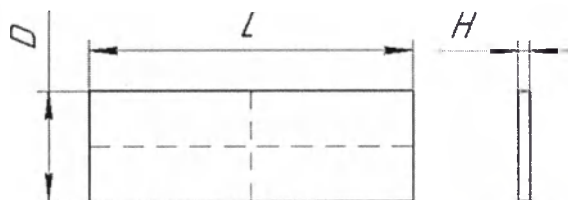


Рис.1- Стекло предметное, СП: СП-2 Люкс, с заточенным краем; СП-7101 шлифованные края; СП-7102, нешлифованные края; Стекло предметное, СП с необработанными краями; СП-5 с односторонним матированием

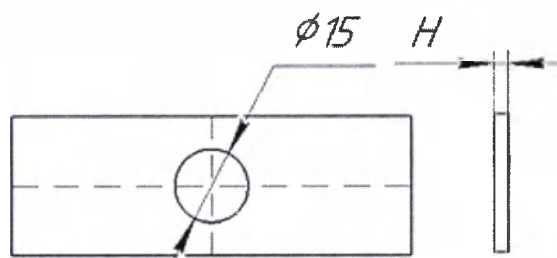


Рис.2- Стекло предметное, СП: СП-7103, с 1-й лункой и шлифованными краями

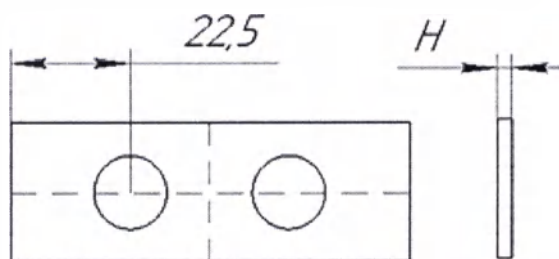


Рис.3- Стекло предметное, СП: СП-7104, с 2-мя лунками и шлифованными краями

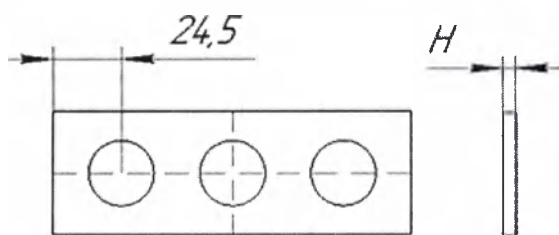


Рис.4- Стекло предметное, СП: СП-7103А, с 3-мя лунками и шлифованными краями

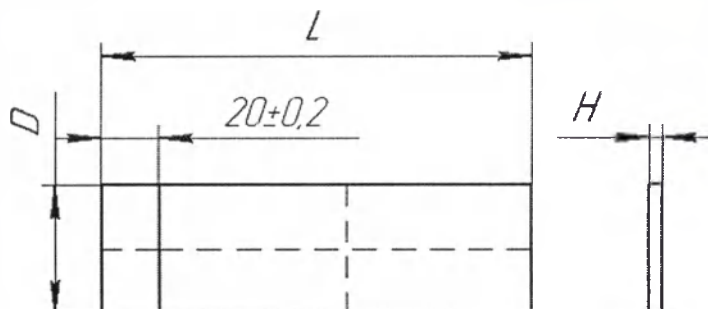


Рис.5-Стекло предметное, СП: СП-7105, со шлифованными краями и полосой для записи; СП-7109, с полированными краями и цветной полосой для записи (полосы могут быть зеленого, оранжевого, розового, желтого или синего цвета); СП с адгезивным покрытием, со шлифованными краями и полосой для записи

- Стекла для микропрепаратов при 20°C должны иметь: показатель преломления $n_D = 1,51 \pm 0,01$; коэффициент дисперсии $v = 60 \pm 2$.
- Стекла для микропрепаратов должны быть химически устойчивыми к действию соляной кислоты и дистиллированной воды.
- Поверхность стекол для микропрепаратов должна быть гладкой, ровной. Волнистость поверхности не допускается.
- Стекла для микропрепаратов не должны содержать пузырей, камней, царапин и свилей.
- Стекла для микропрепаратов должны иметь притупление кромки. На кромке стекла допускаются выколки размером не более 0,1 мм.
- Допуск параллельности рабочих поверхностей стекол должен быть не более 0,03 мм.
- Допуск плоскостности рабочих поверхностей стекол должен быть не более 0,1 мм на длине 100 мм.
- Стекла для микропрепаратов должны изготавливаться из бесцветного силикатного стекла марки НС-1, НС-1А. Допускается слабо-голубой оттенок стекла.

8. Дезинфекция

- Изделия должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113.
- Стекла должны быть устойчивы к дезинфекциям с использованием физического метода. Перед дезинфекцией стекла должны быть очищены от органических загрязнений и промыты водопроводной водой.
- Стекла должны обеспечивать возможность их дезинфекции 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

9. Комплектность

Комплектность поставки

- изделие одного вида (исполнения), размера и партии;
- паспорт на изделие.

10. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

11. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

12. Требования к эксплуатации

Стекла для микропрепаратов при эксплуатации должны быть исправны при воздействии температуры $(+10 - +35) \pm 2$ °C и влажности $(80 - 100) \pm 2\%$ воздуха.

13. Транспортирование и хранение

- Транспортировка должна производиться в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующими на транспорте каждого вида правилами, утвержденными в установленном порядке.
- Условия транспортирования изделий в заводской упаковке предприятия - изготовителя - по группе Ж2 ГОСТ 15150.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в условиях хранения не менее 12 часов до использования.
- Условия хранения - по группе С ГОСТ 15150. При хранении изделия должны быть защищены от воздействия загрязнений, атмосферных осадков и химических испарений.
- Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий, защиту от загрязнений и атмосферных осадков при транспортировании и хранении

14. Сведения об утилизации

Использованные изделия утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Использованные изделия относятся к отходам класса Б по СанПиН 2.1.7.2790.

15. Гарантии производителя

- Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭксимКИП» (ООО «ЭксимКИП»), 141407, Московская обл., г. Химки, Нагорное ш., д. 2., корпус 7, пом.2
Тел.: +7(499) 703-02-43, E-mail: exim@eximlab.ru
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.50-003-61554801-2017 (устойчивость к действию соляной кислоты и дистиллированной воды; устойчивость к дезинфекции) при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

16. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

М. П. «Оксимкип» для документов