

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЭргоПродакшн»



Р.В. Аносов

«08» августа 2019 г

Фотографические изображения медицинского изделия

«Тушь гистологическая HistoSafe®» по ТУ 21.20.23-008-89079081-2017

Фото 1. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, объем 30 мл.

IVD REF 19-001/B-30 По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 30 мл

LOT 5130
08.2019
08.2021

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Состав: чёрная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой. 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки. 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре. 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

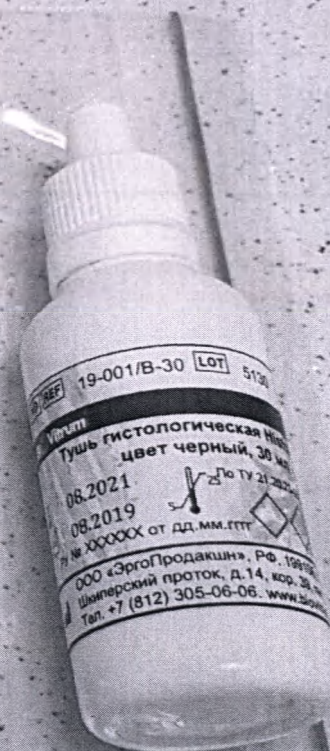


Фото 2. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, объем 30 мл.

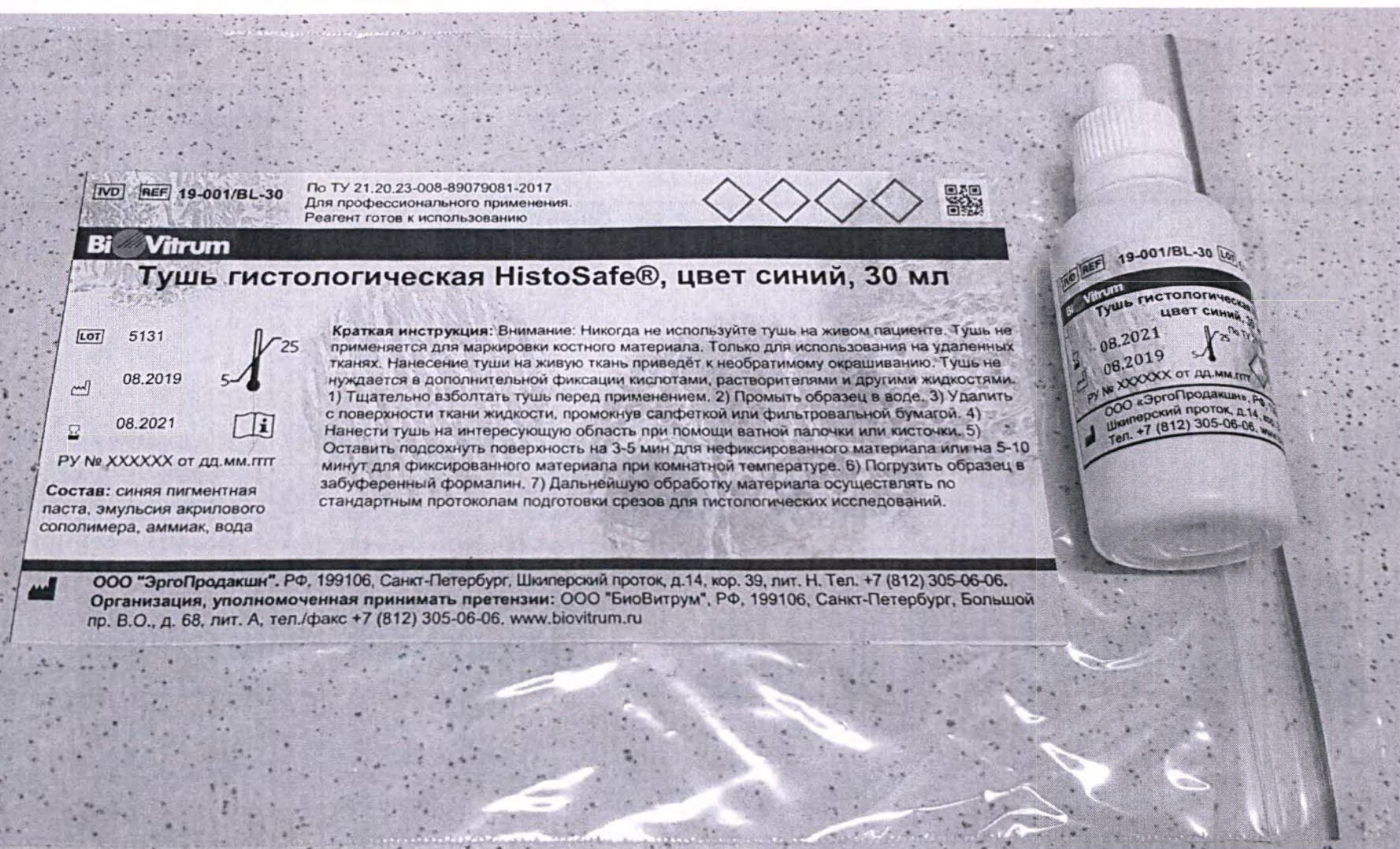


Фото 3. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, объем 30 мл.



Фото 4. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, объем 30 мл.

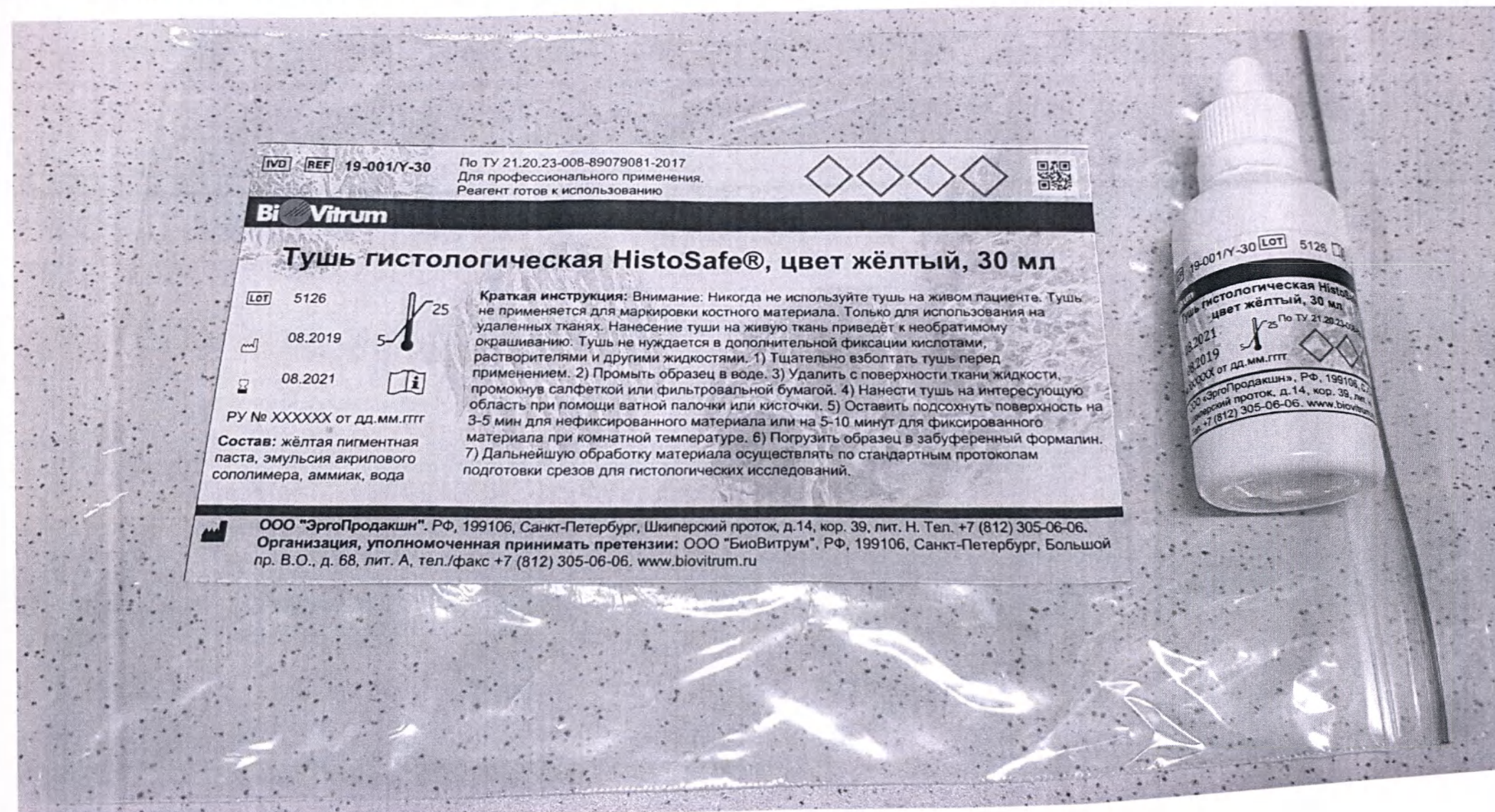


Фото 5. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, объем 30 мл.

IVD REF 19-001/R-30 По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 30 мл

LOT 5127
08.2019
08.2021

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Состав: красная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой. 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки. 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре. 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн". Рф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

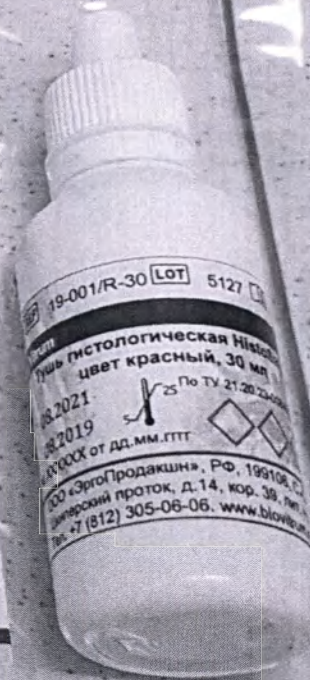


Фото 6. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, объем 30 мл.

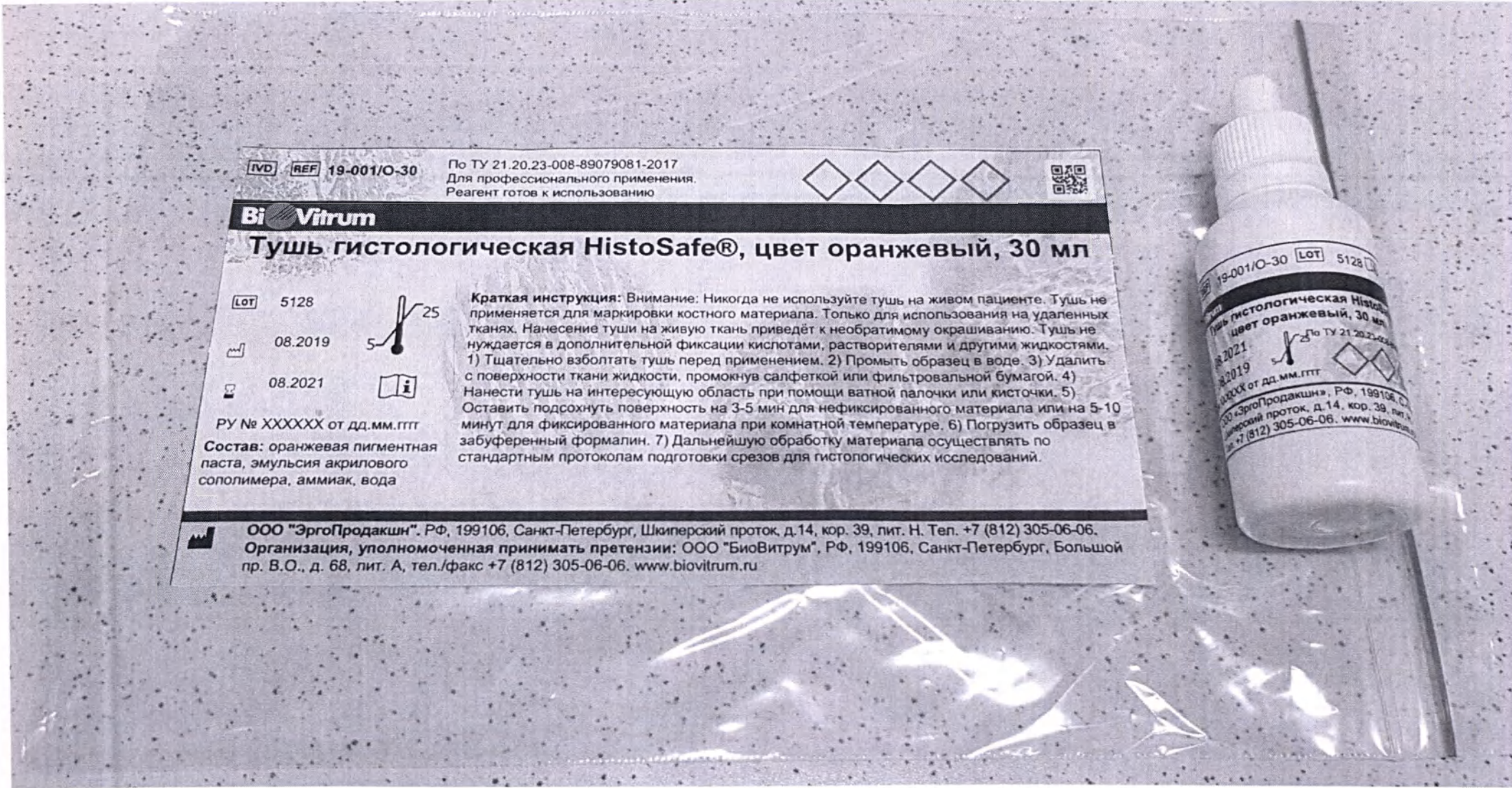


Фото 7. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, объем 30 мл.

IVD REF 19-001/P-30

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 30 мл

LOT 5129

08.2019

08.2021

ПУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Состав: фиолетовая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой. 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки. 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре. 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.



ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
 Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

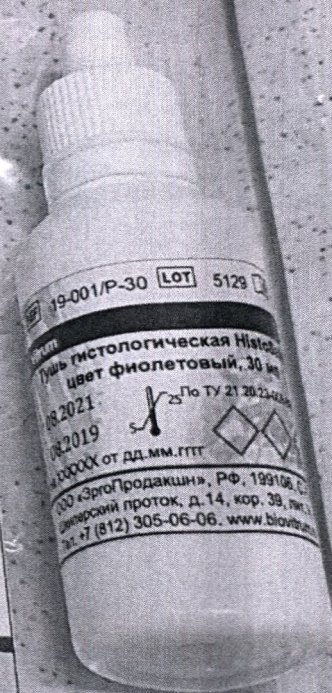


Фото 8. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, объем 60 мл.

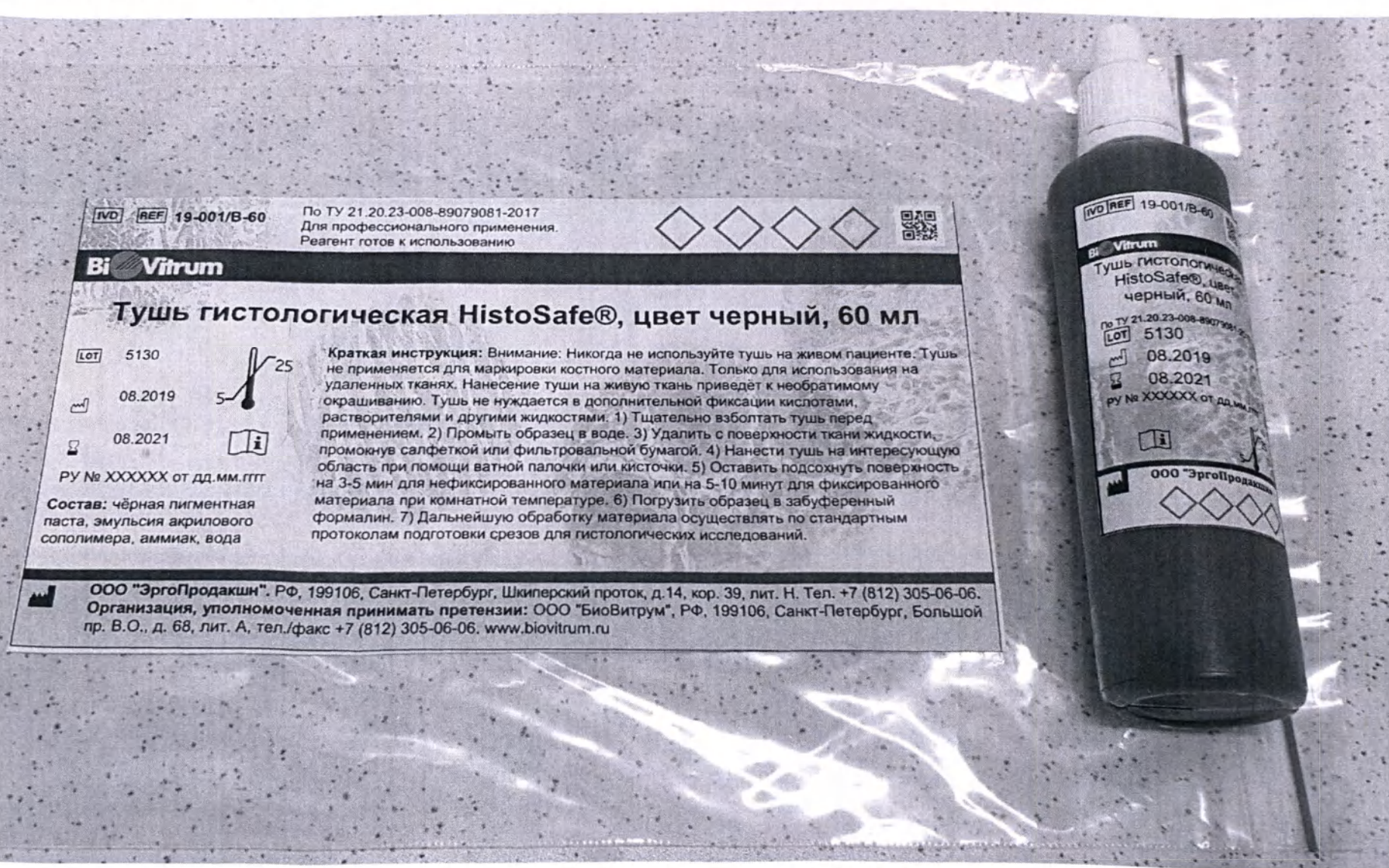


Фото 9. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, объем 60 мл.

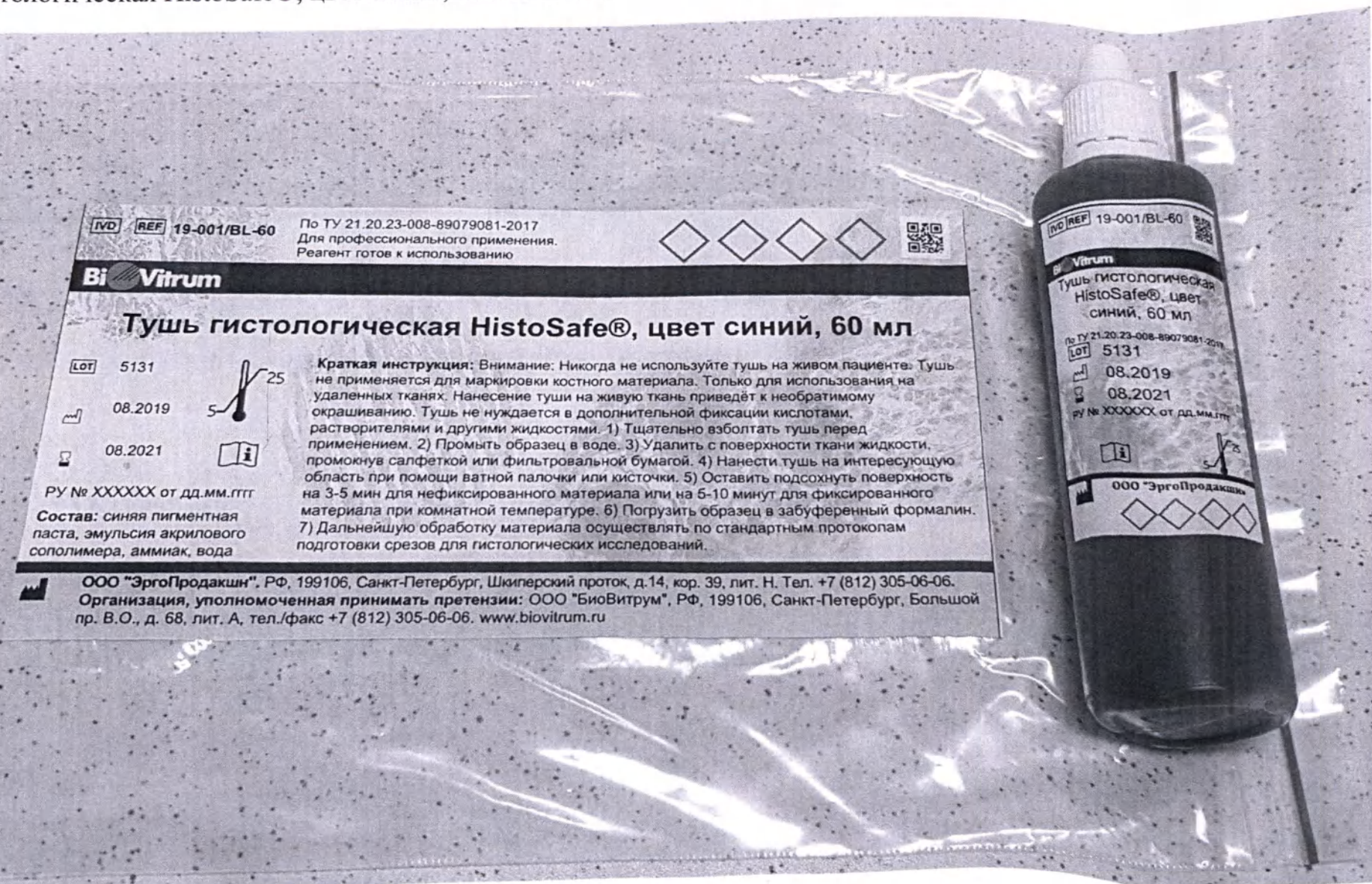


Фото 10. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, объем 60 мл.

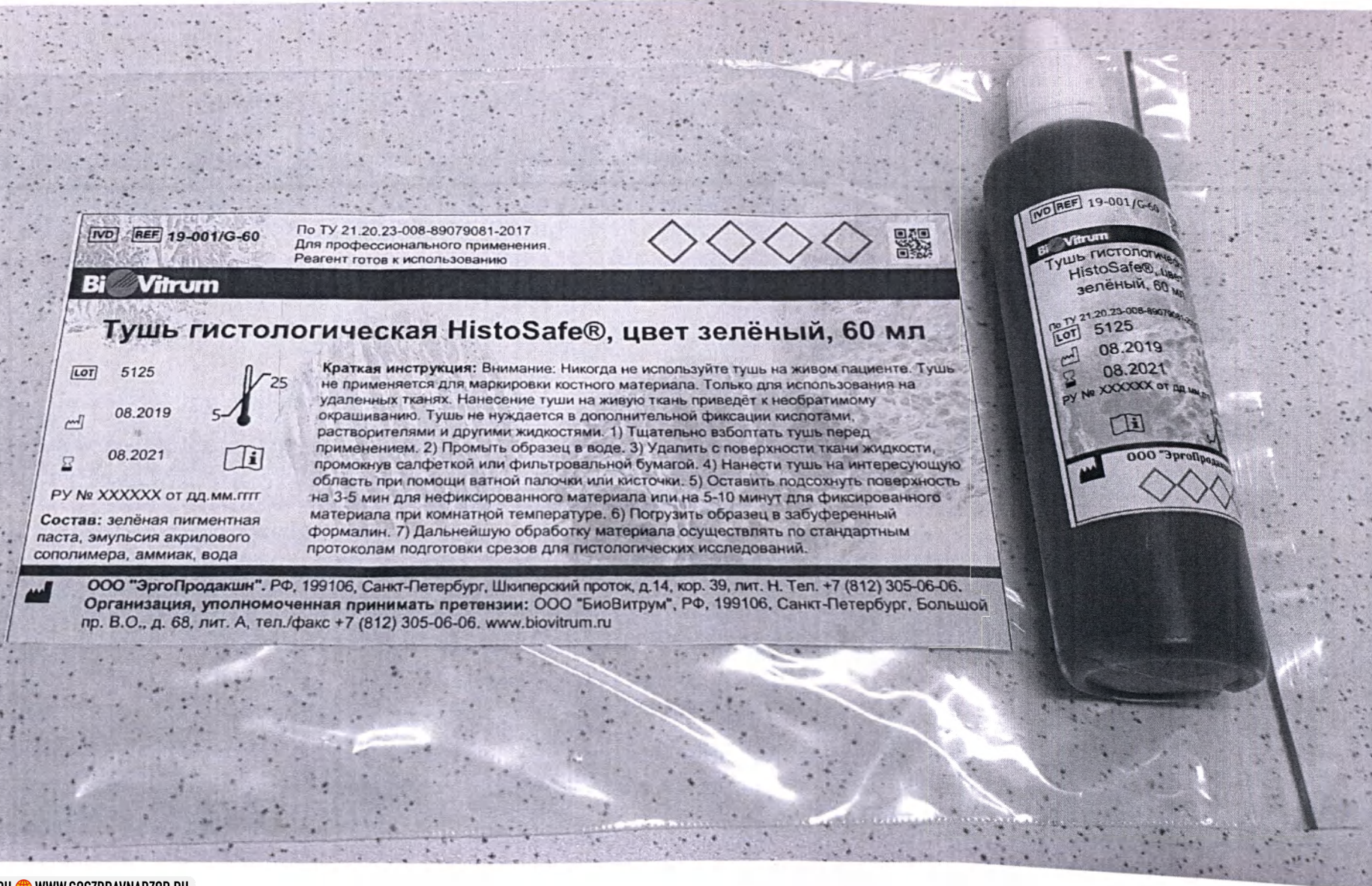


Фото 11. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, объем 60 мл.

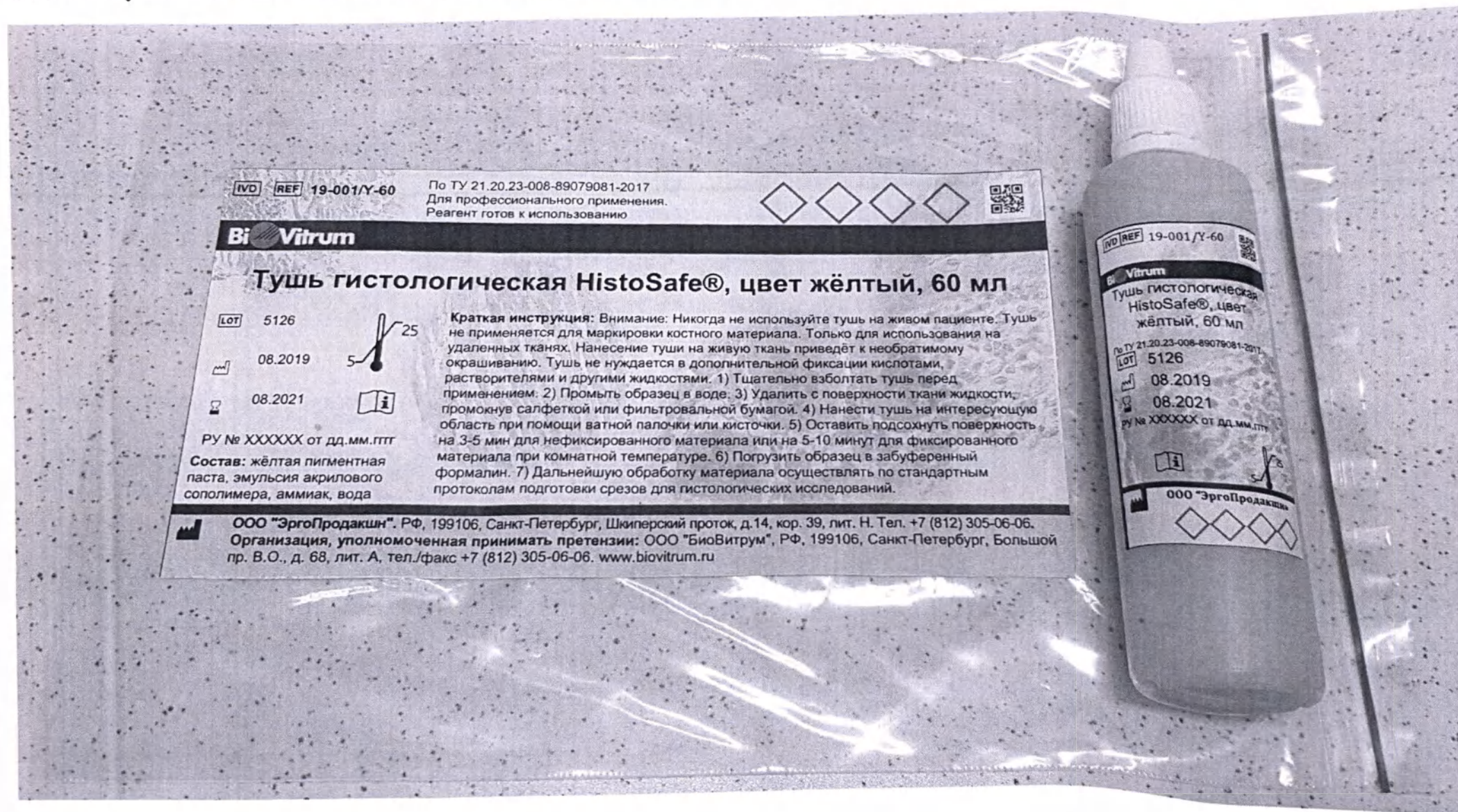


Фото 12. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, объем 60 мл.

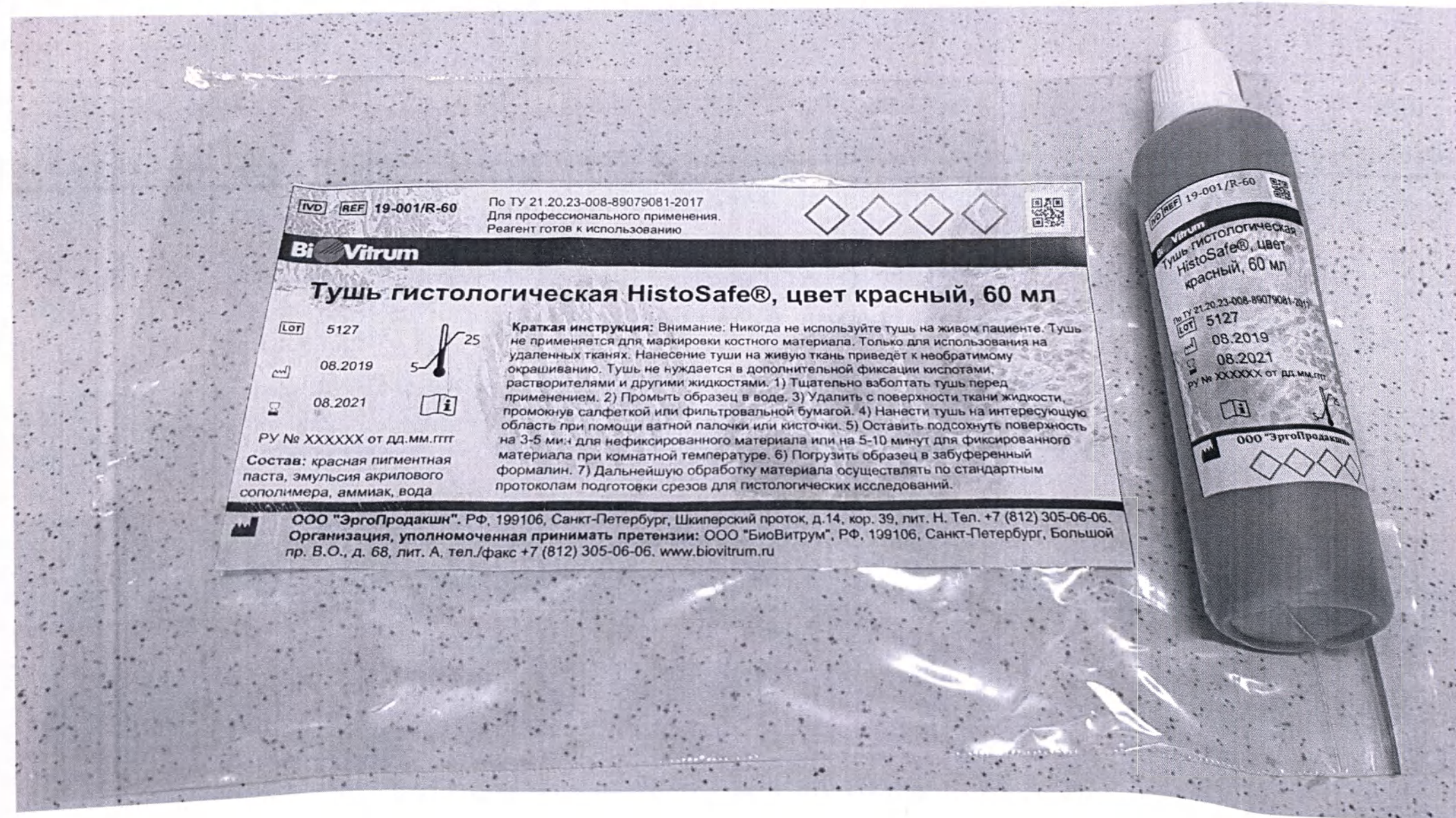


Фото 13. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, объем 60 мл.

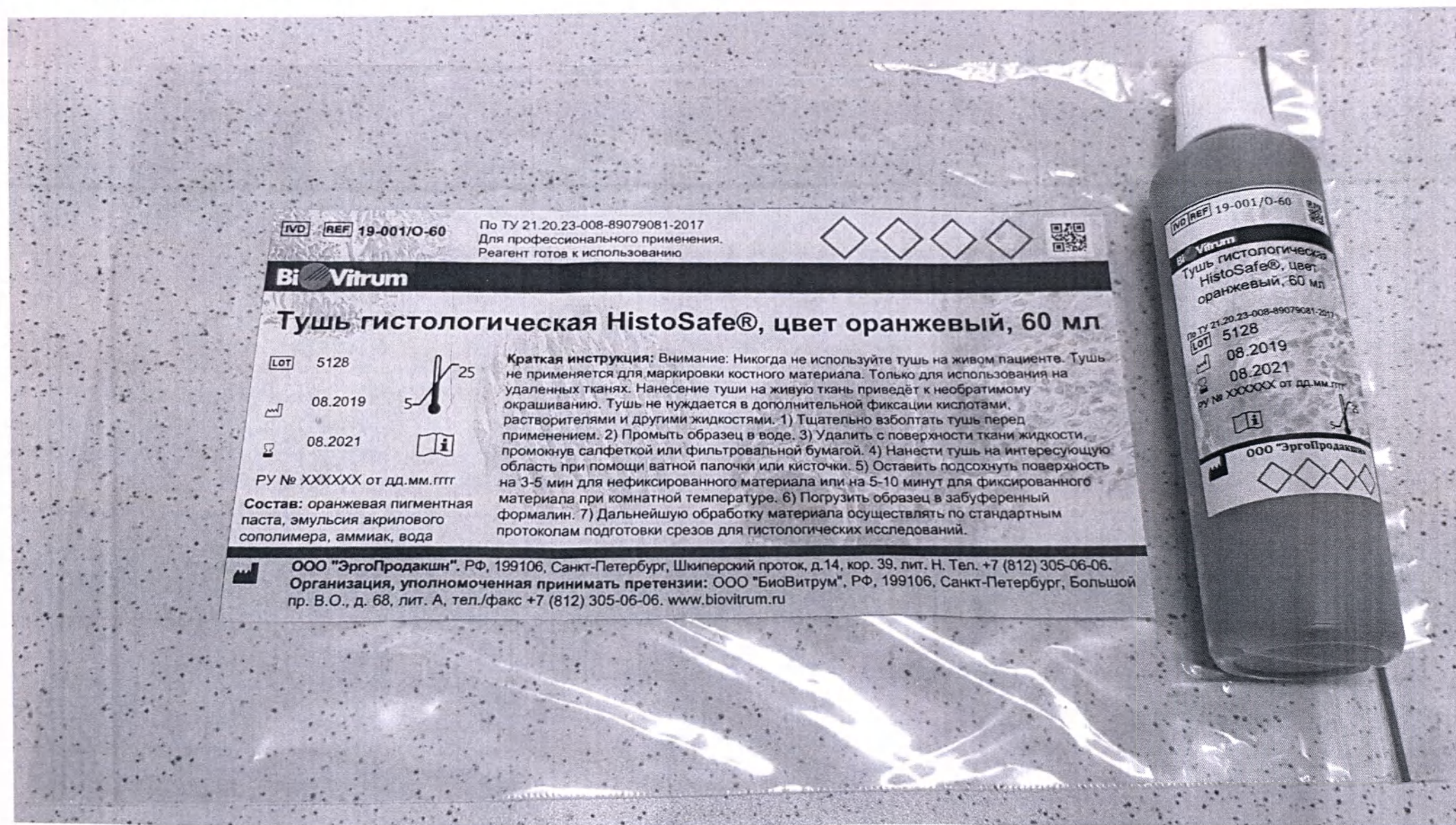


Фото 14. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, объем 60 мл.



Фото 15. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, объем 250 мл.




REF 19-001/BL-250

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017.
 Для профессионального применения.
 Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, ц

LOT 5131

08.2019

08.2021

Ру № XXXXXX от дд.мм.гггг

Состав: синяя пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода



Краткая инструкция: Внимание: Никогда не применять для мазков с удаленных тканей: необратимому окрашиванию. Тушь не использовать с кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Промыть образец перед применением. 2) Промыть образец жидкостью, промокнув салфеткой или фланелевой тканью. 3) Подсохнуть поверхность на 3-5 мин до фиксации. 4) Погрузить образец в забуференный фиксатор на 10 минут для фиксации материала. 5) Погрузить образец в забуференный фиксатор на 10 минут для фиксации материала. 6) Погрузить образец в забуференный фиксатор на 10 минут для фиксации материала. 7) Погрузить образец в забуференный фиксатор на 10 минут для фиксации материала. 8) Погрузить образец в забуференный фиксатор на 10 минут для фиксации материала. 9) Погрузить образец в забуференный фиксатор на 10 минут для фиксации материала. 10) Погрузить образец в забуференный фиксатор на 10 минут для фиксации материала.

ООО "ЭргоПродакшн", Р.Ф., 199106, Санкт-Петербург, Шлиссбургский пр. д. 68, лит. А, телефон: +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать участие в тендерах

199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, телефон: +7 (812) 305-06-06.



[illegible]

[illegible]

Фото 19. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, объем 250 мл.



Фото 20. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, объем 250 мл.



Фото 21. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, объем 250 мл.

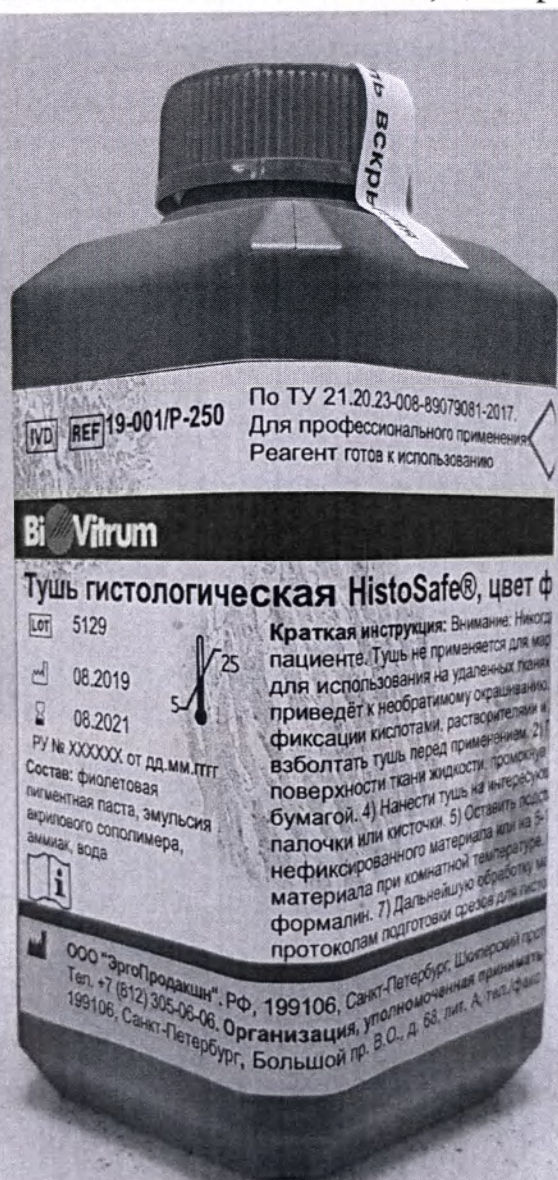


Фото 22. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, объем 500 мл.

Лицевая сторона.



Фото 23. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, объем 500 мл.

Оборотная сторона.

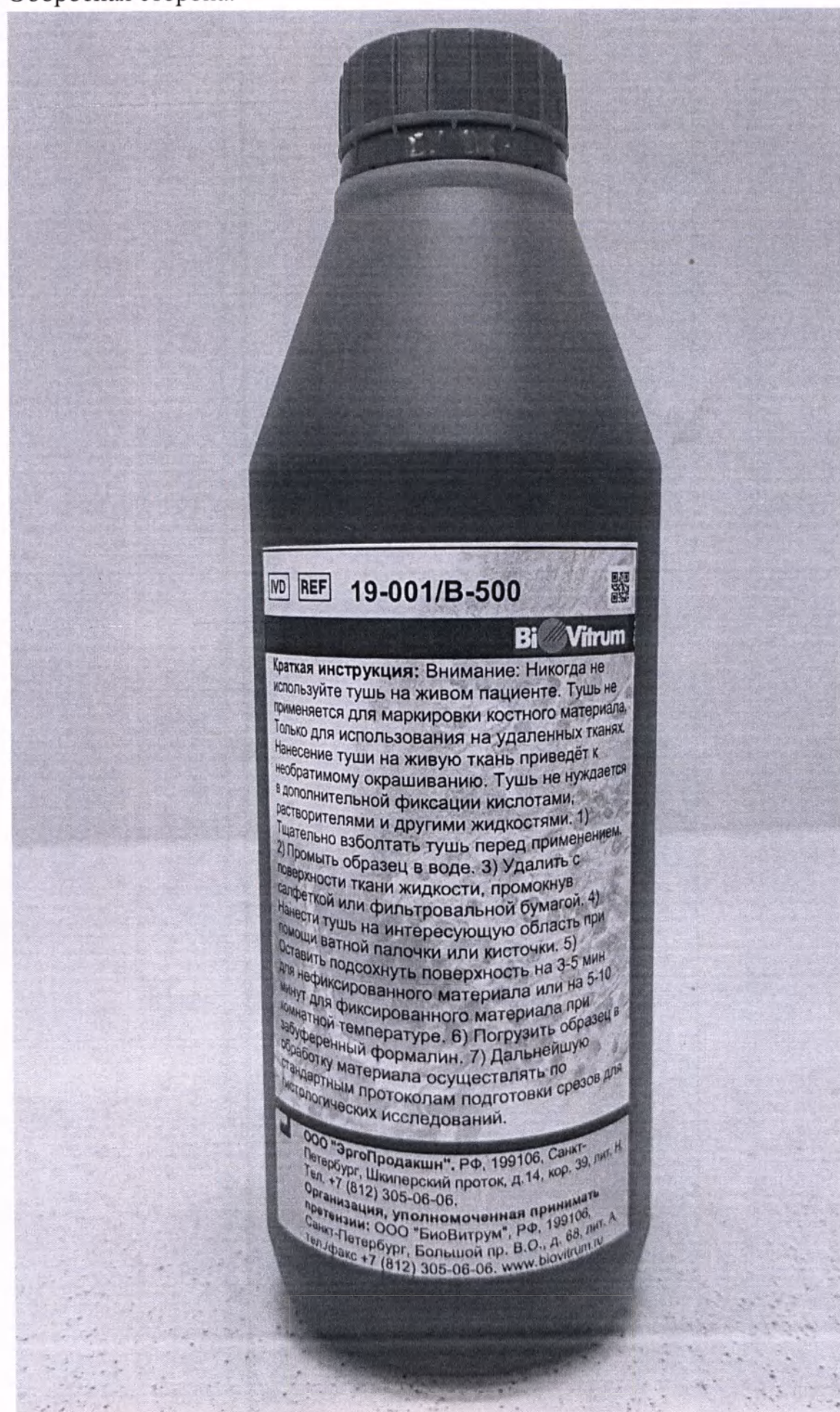


Фото 24. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, объем 500 мл.

Лицевая сторона.



Фото 25. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, объем 500 мл.

Оборотная сторона.

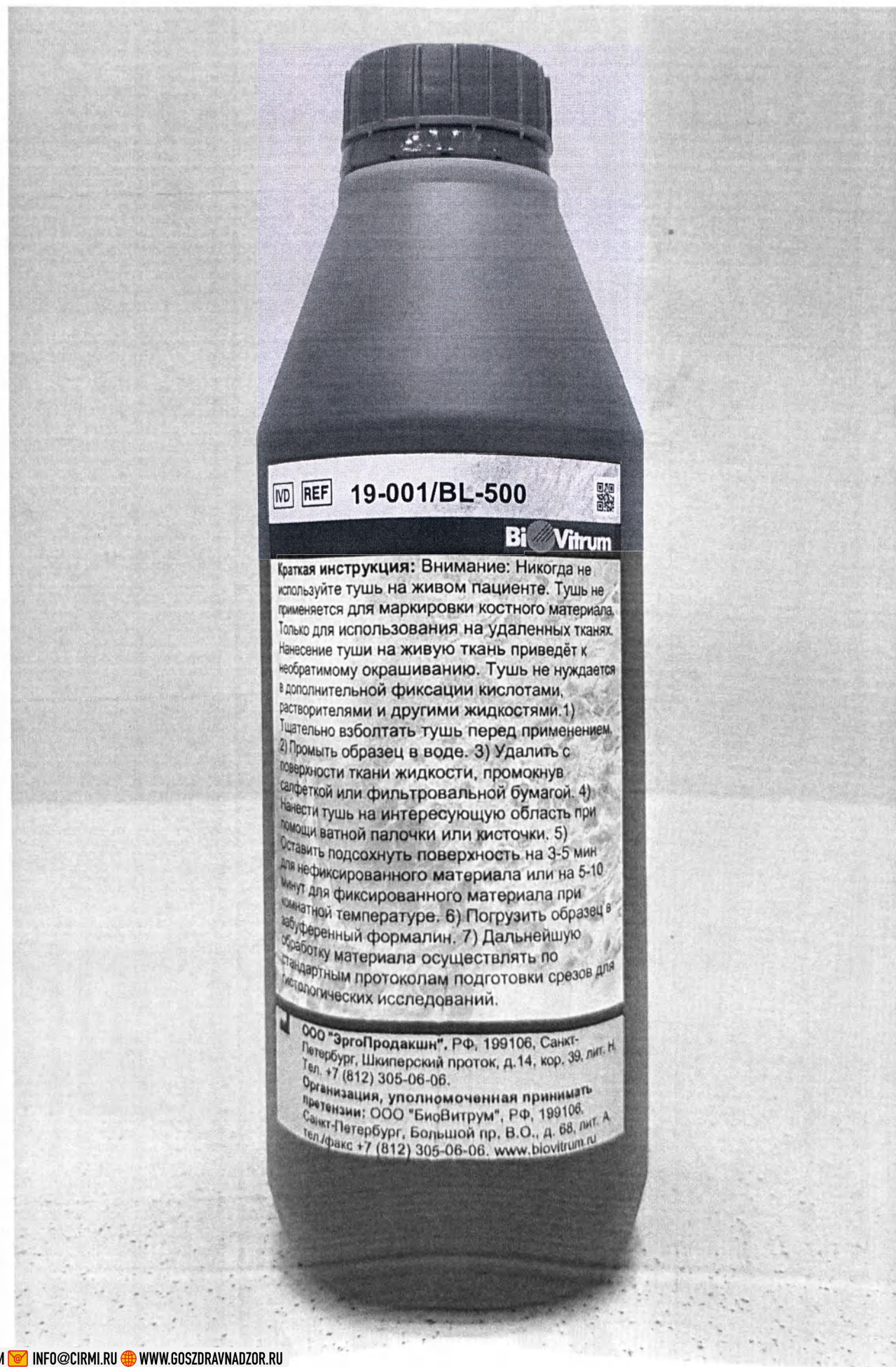


Фото 26. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, объем 500 мл.

Лицевая сторона.



Фото 27. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, объем 500 мл.

Лицевая сторона.



Фото 28. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, объем 500 мл.

Лицевая сторона.



Фото 29. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, объем 500 мл.

Оборотная сторона.

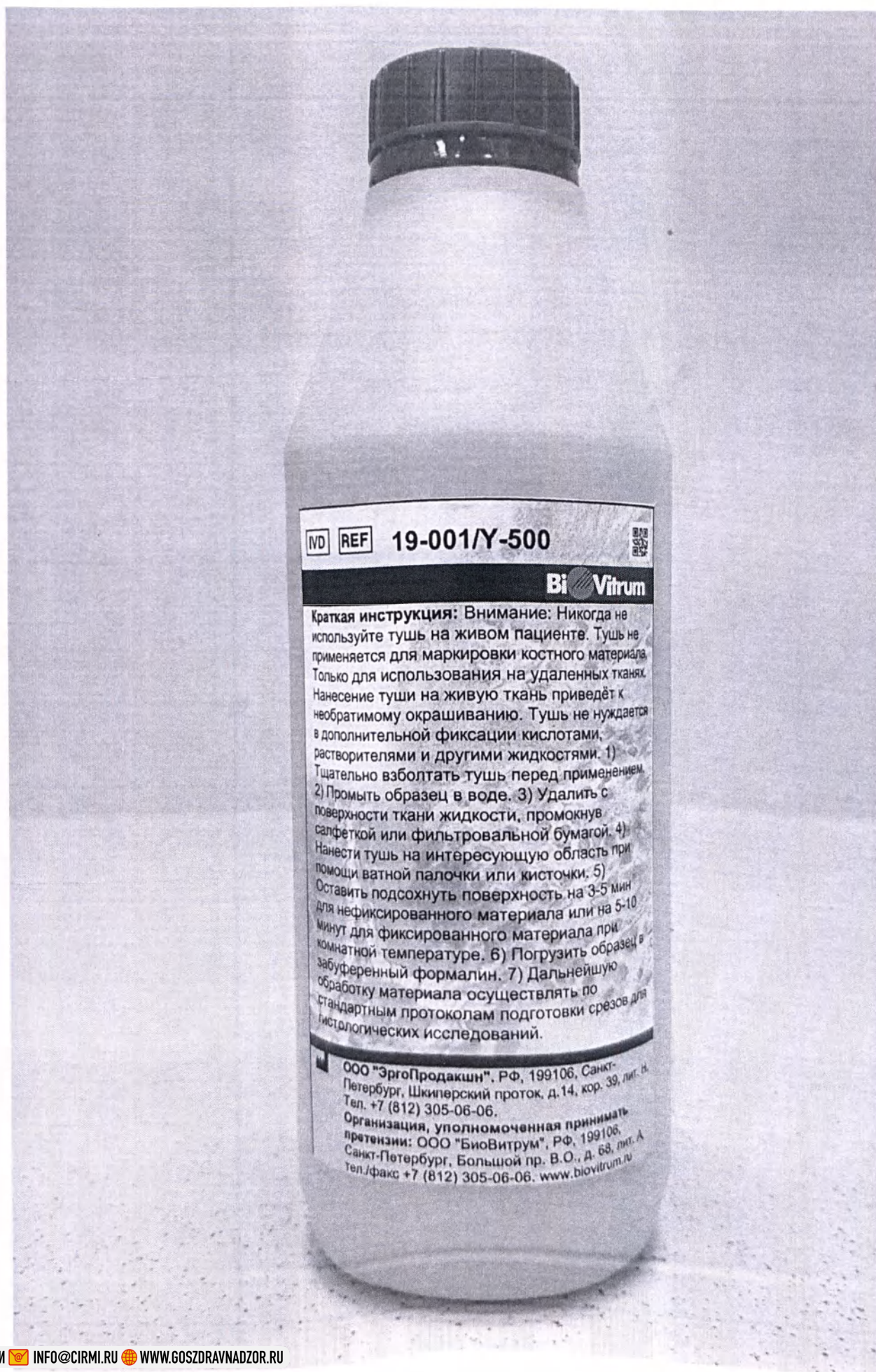


Фото 30. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, объем 500 мл.

Лицевая сторона.



Фото 31. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, объем 500 мл.

Оборотная сторона.



Фото 32. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, объем 500 мл.

Лицевая сторона.



Фото 33. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, объем 500 мл.

Оборотная сторона.



IVD REF 19-001/O-500

Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой. 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки. 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре. 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн", Р.Ф. 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н.
Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Р.Ф. 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А.
тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Фото 34. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, объем 500 мл.

Лицевая сторона.

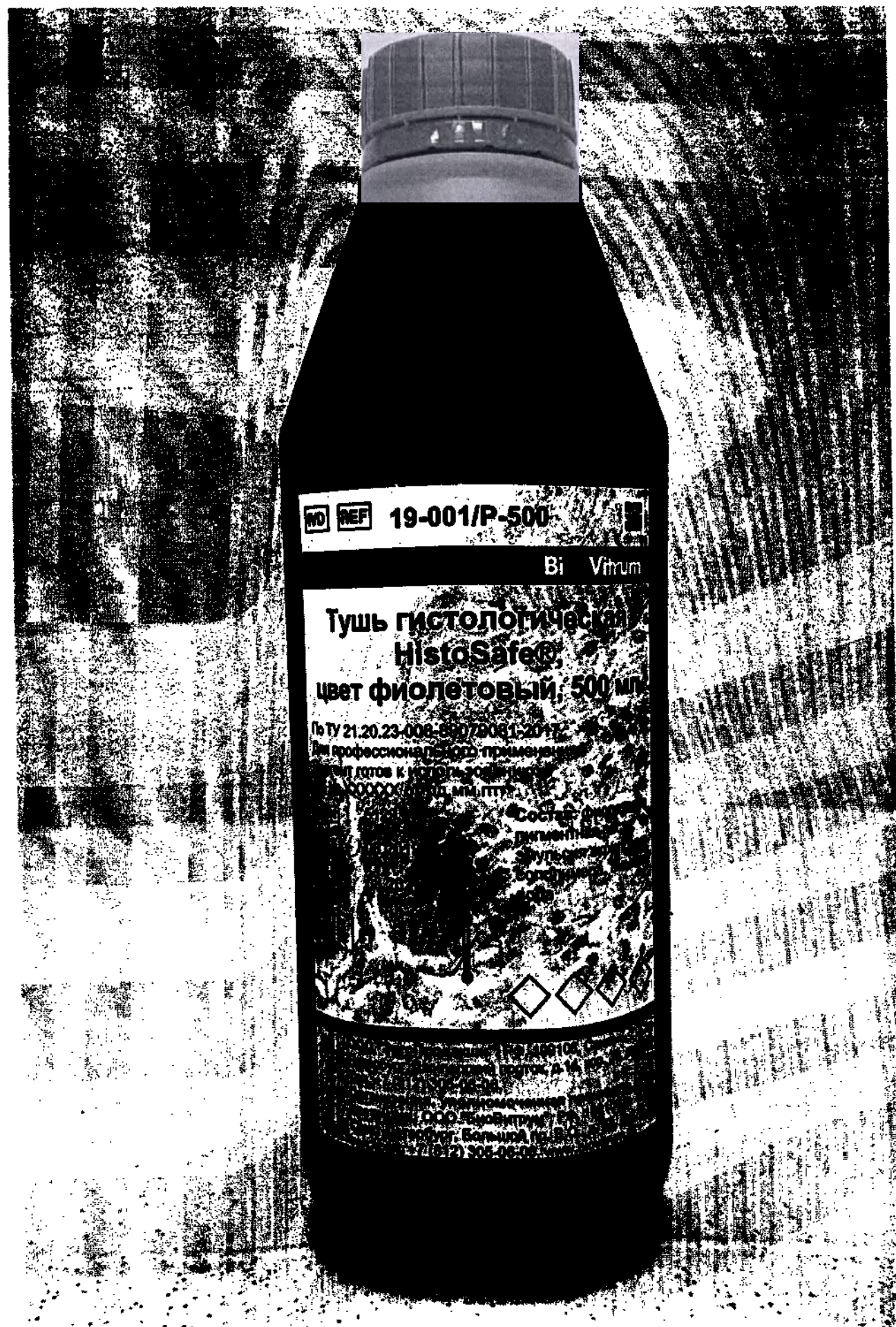



Фото 35. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, объем 500 мл.

Оборотная сторона.



Фото 36. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, объем 1 л.

Лицевая сторона.

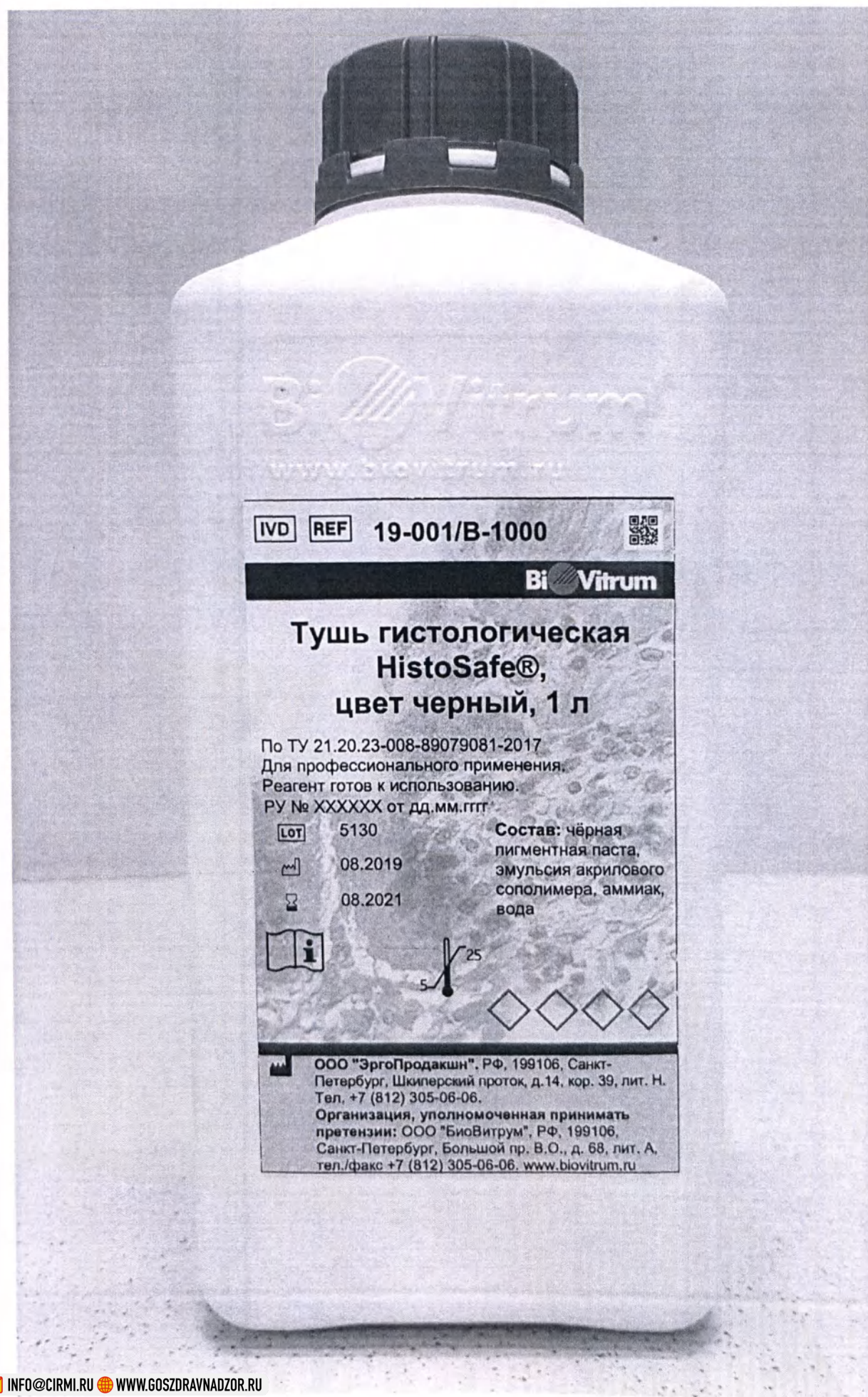

Оборотная сторона.

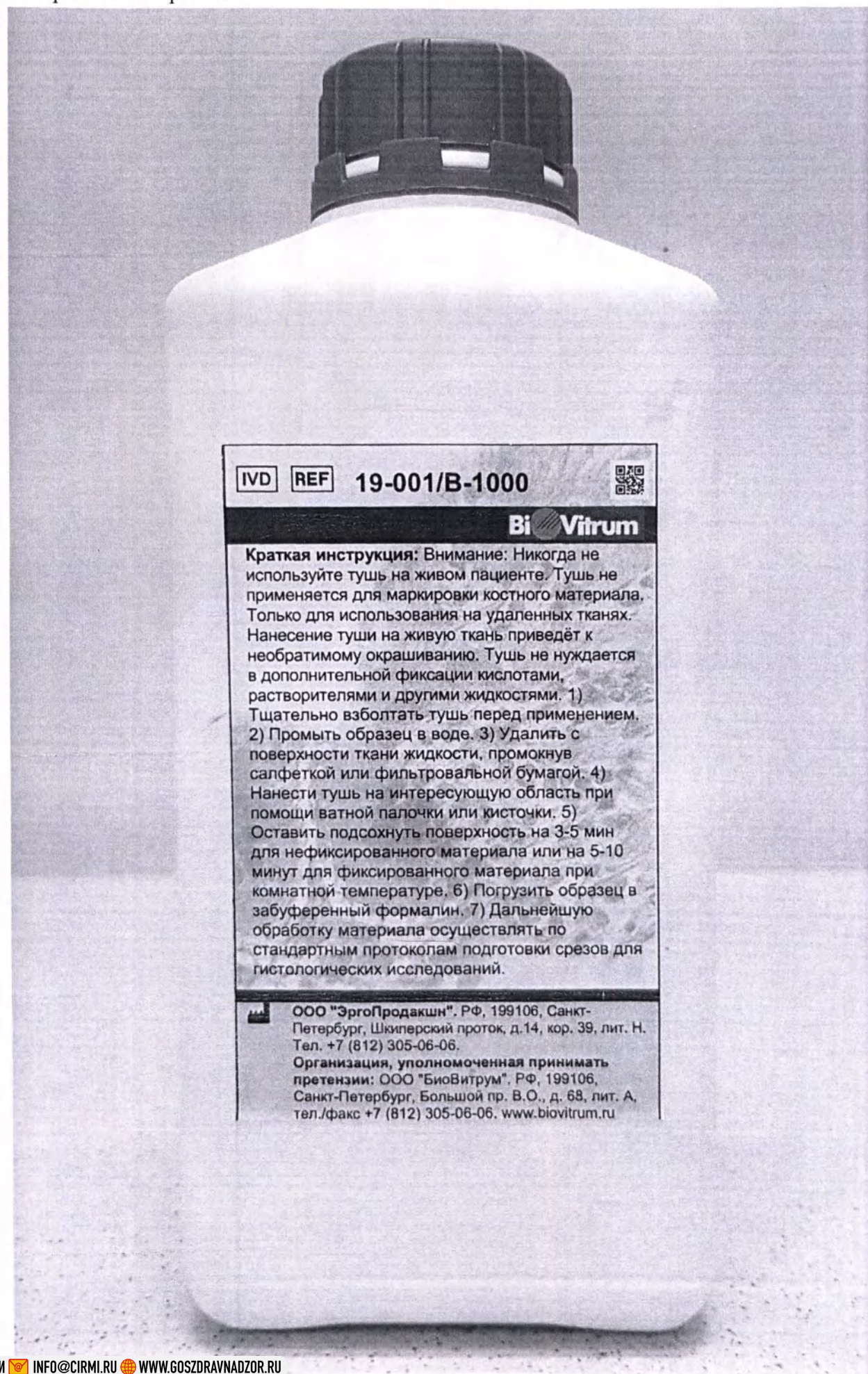



Фото 38. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, объем 1 л.

Лицевая сторона.



Фото 39. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, объем 1 л.

Оборотная сторона.

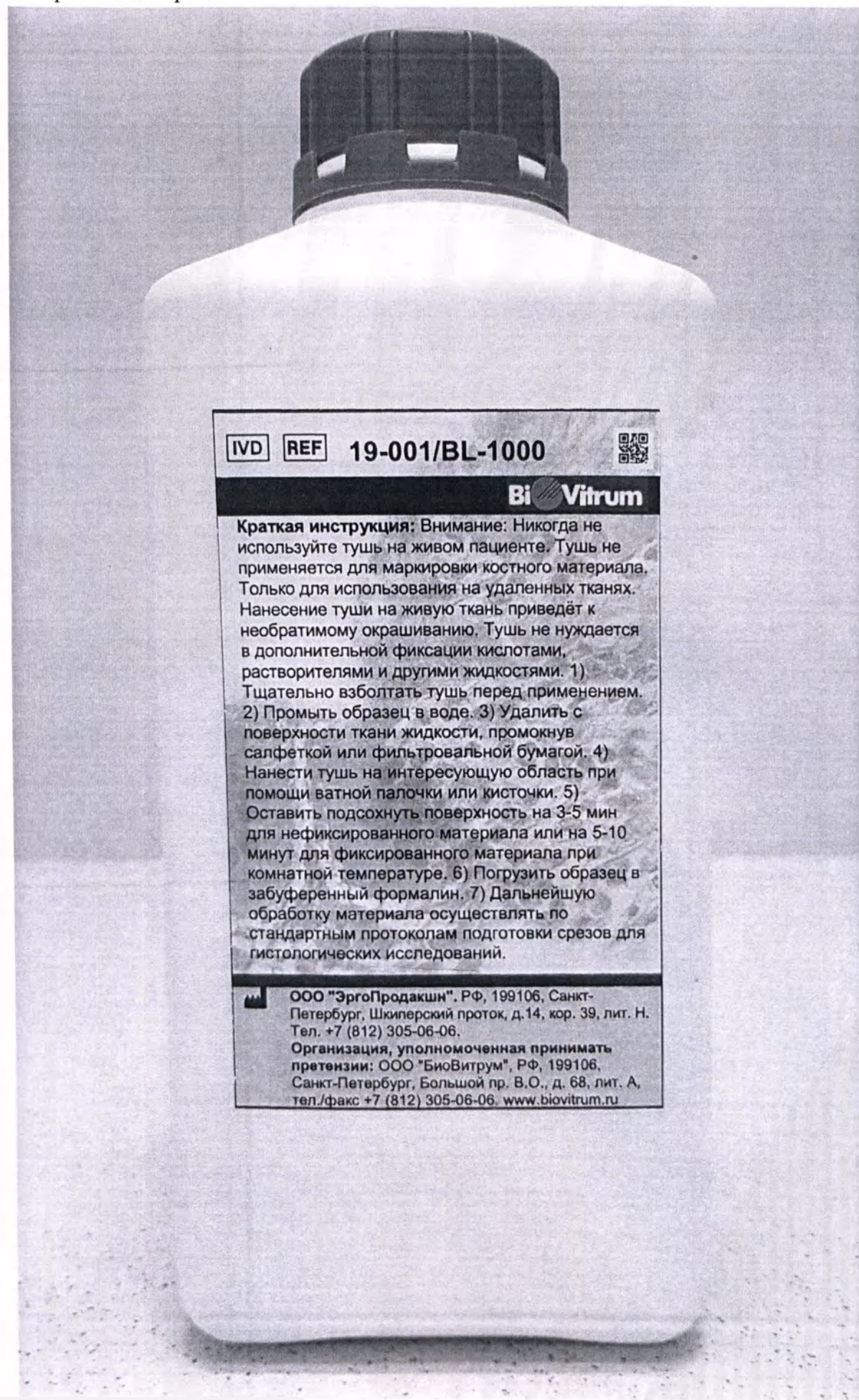

IVD

REF

19-001/BL-1000



Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой. 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки. 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре. 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.



ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Фото 40. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, объем 1 л.

Лицевая сторона.

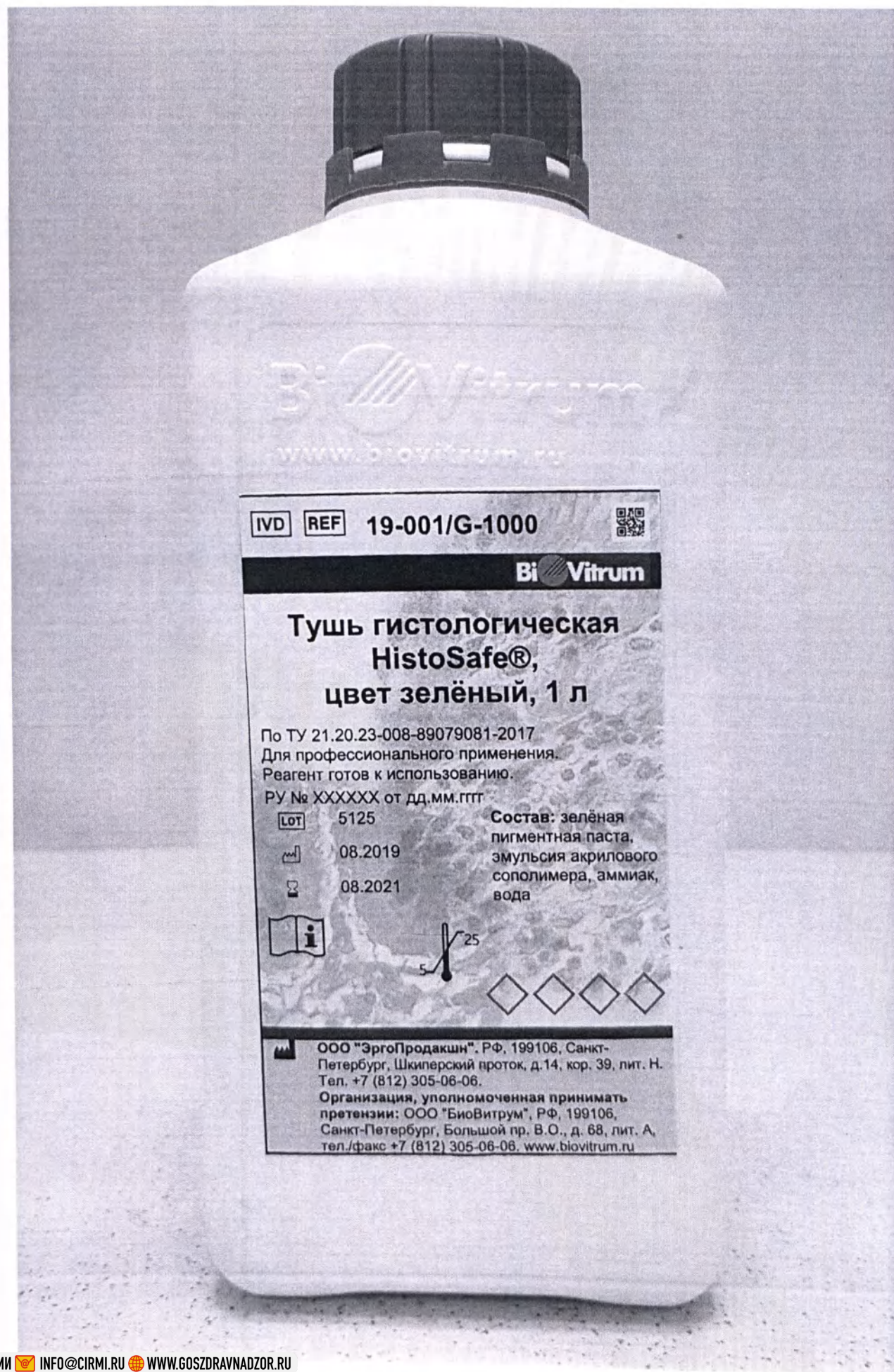


Фото 41. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, объем 1 л.

Оборотная сторона.

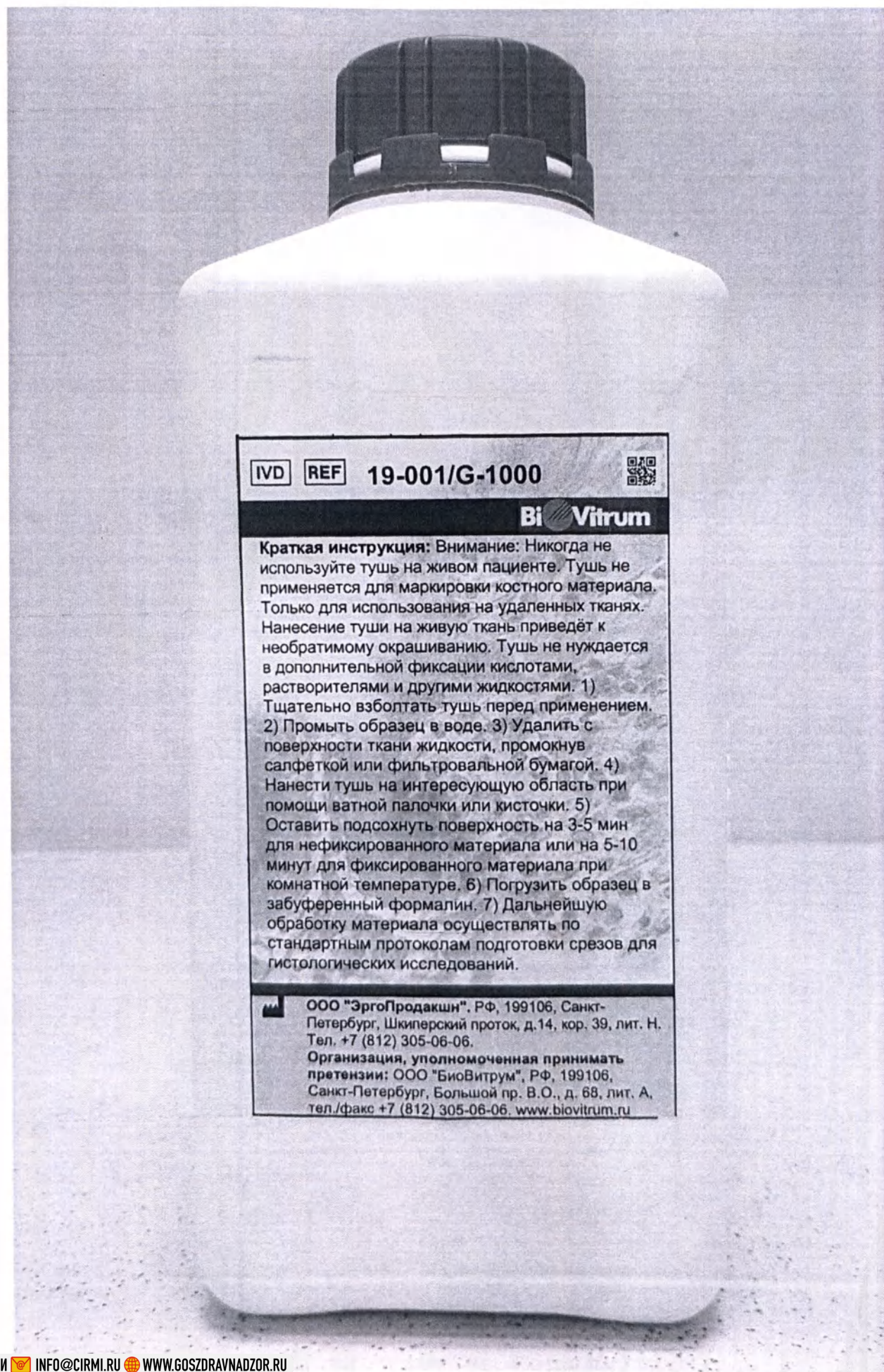


Фото 42. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, объем 1 л.

Лицевая сторона.


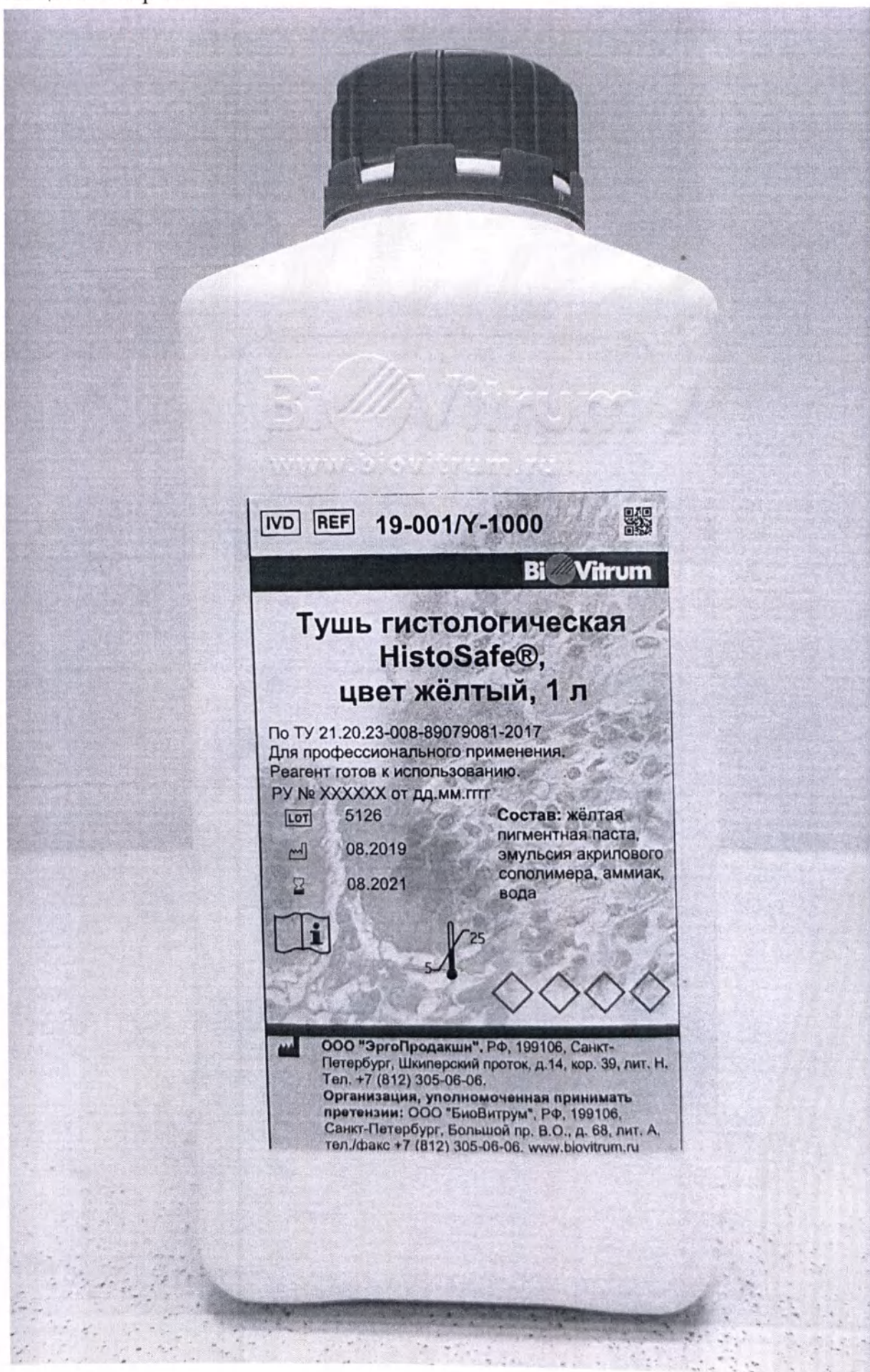


Фото 43. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, объем 1 л.

Оборотная сторона.

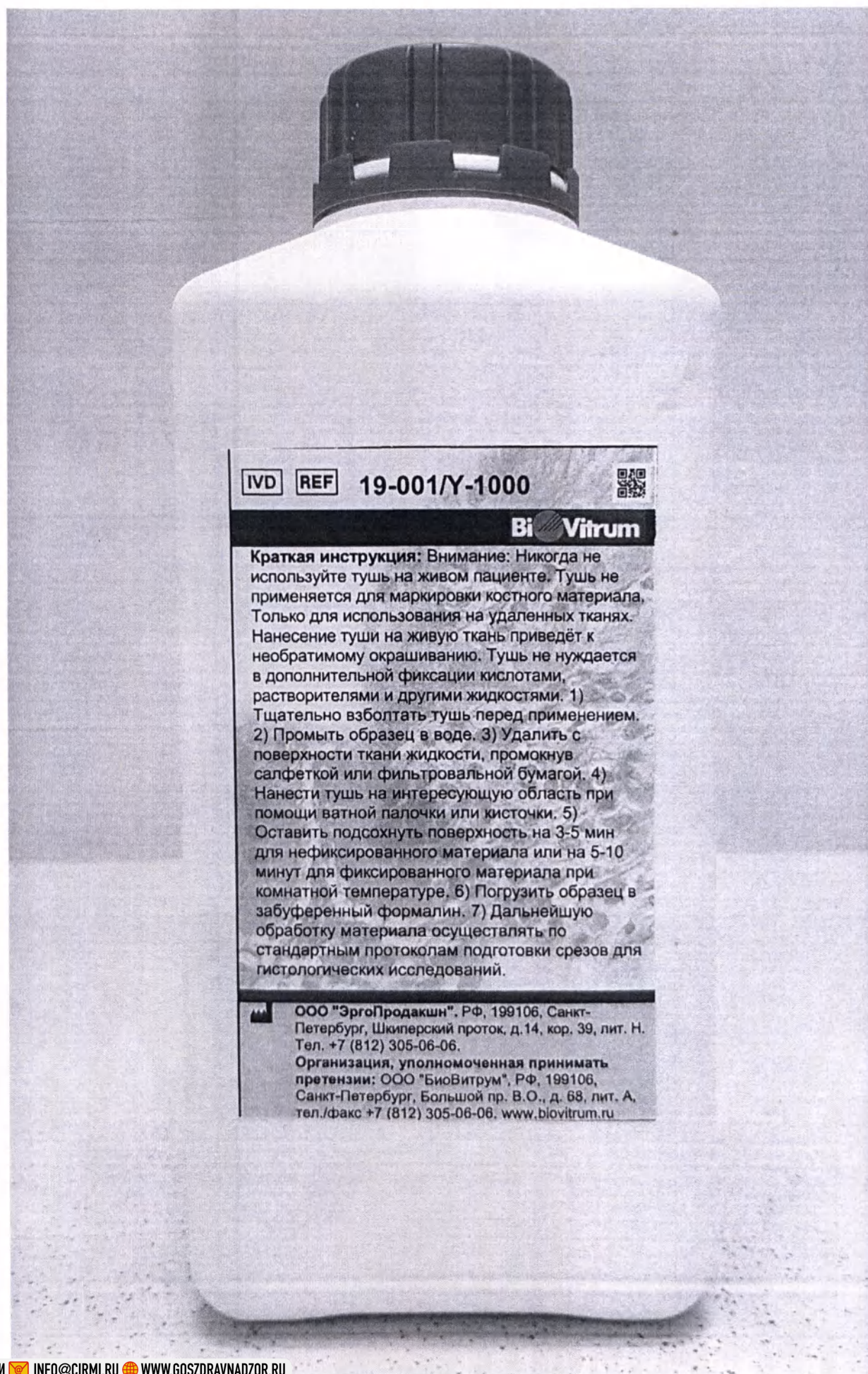

IVD

REF

19-001/Y-1000



Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой. 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки. 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре. 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.



ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Фото 44. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, объем 1 л.

Лицевая сторона.

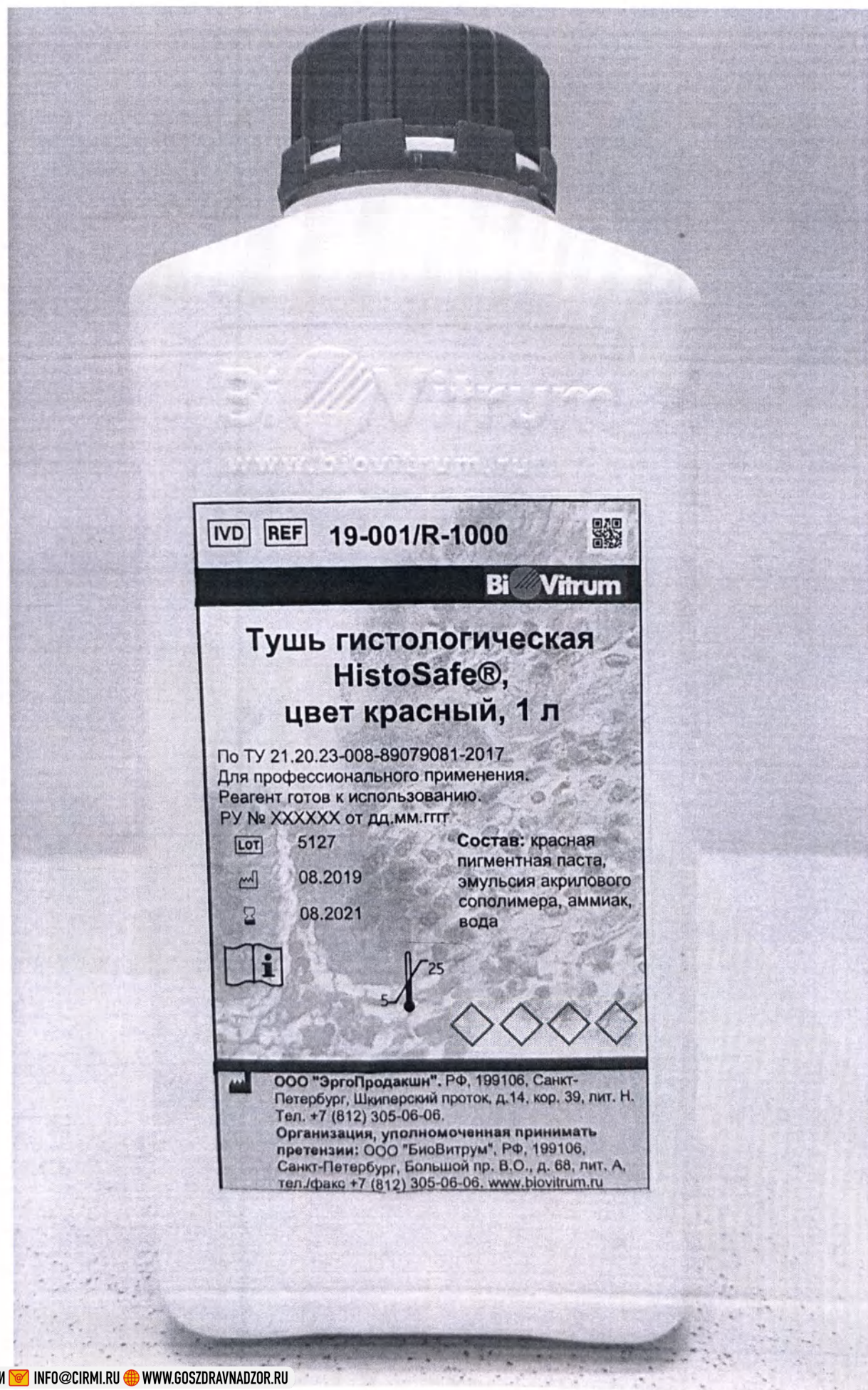


Фото 45. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, объем 1 л.

Оборотная сторона.

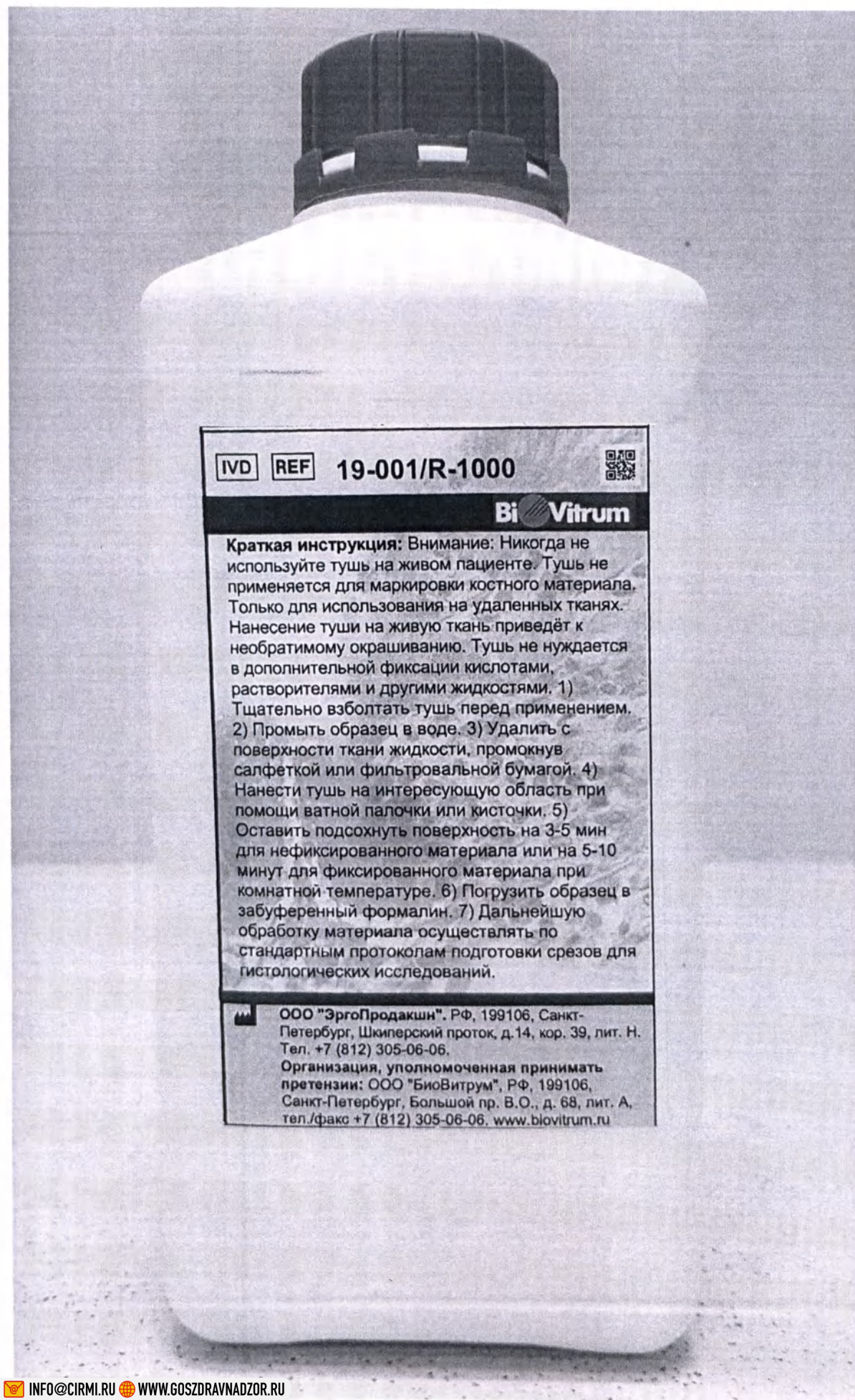


Фото 46. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, объем 1 л.

Лицевая сторона.

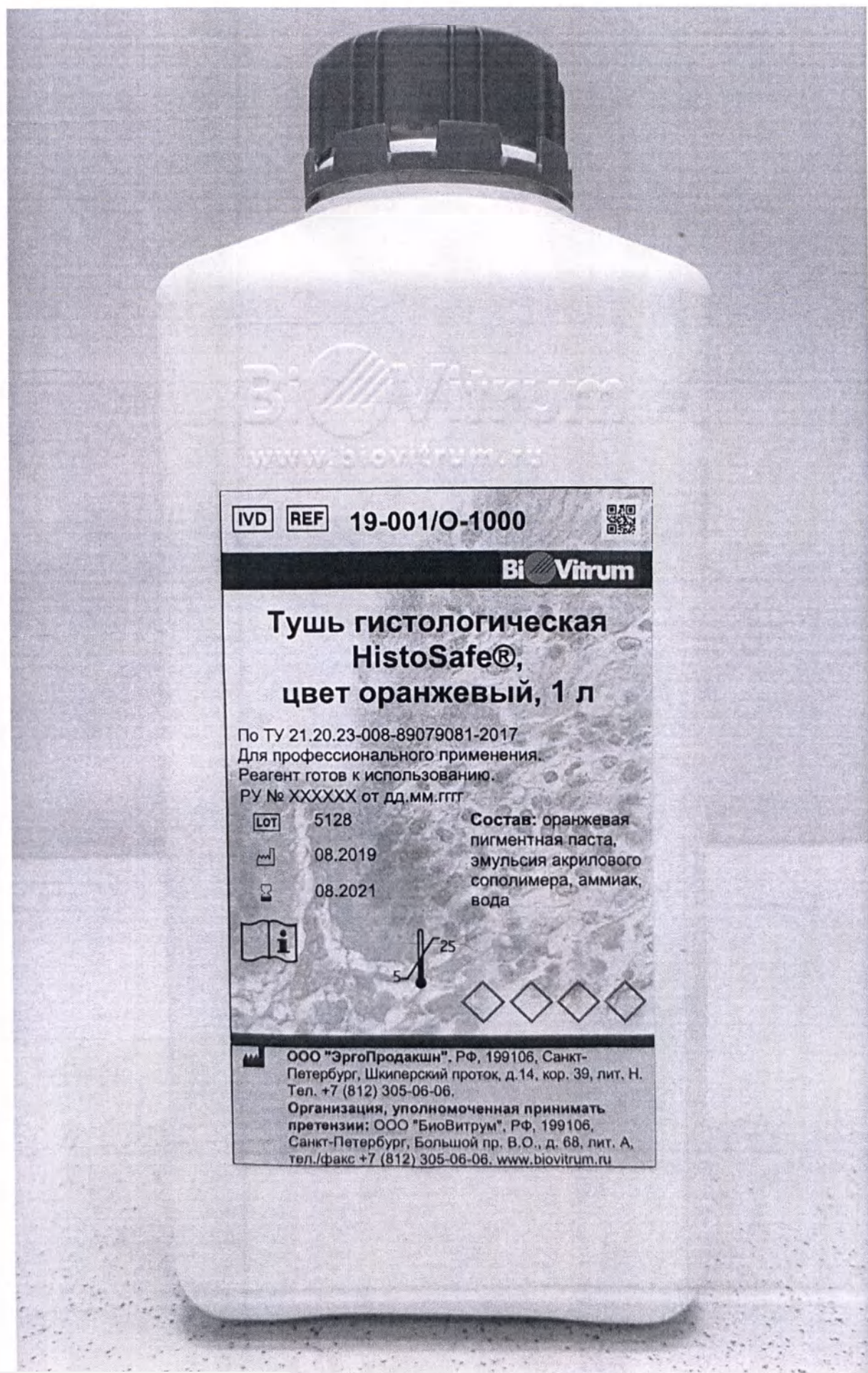



Фото 47. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, объем 1 л.

Оборотная сторона.




Фото 48. Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, объем 1 л.

Лицевая сторона.

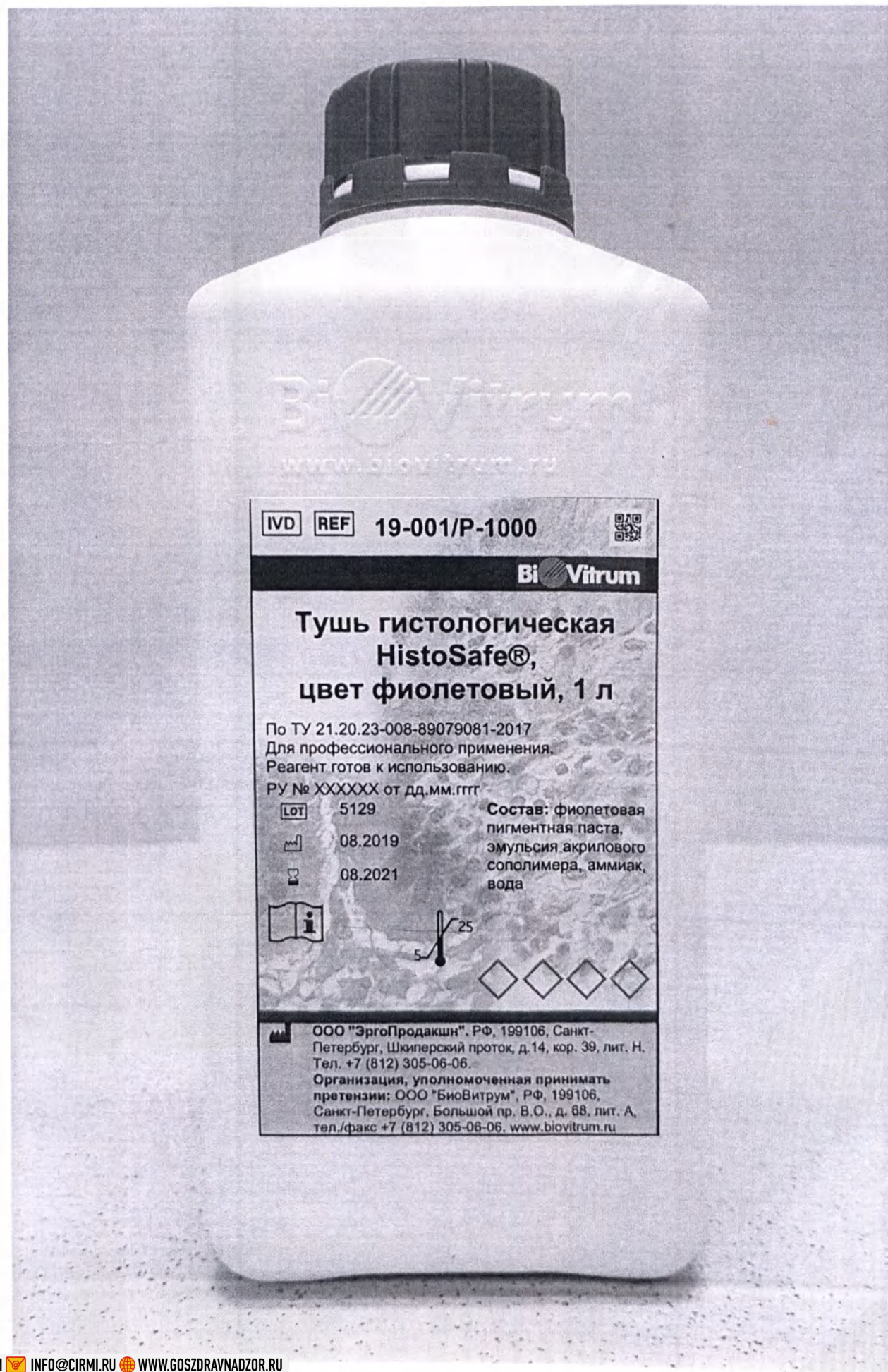

Оборотная сторона.

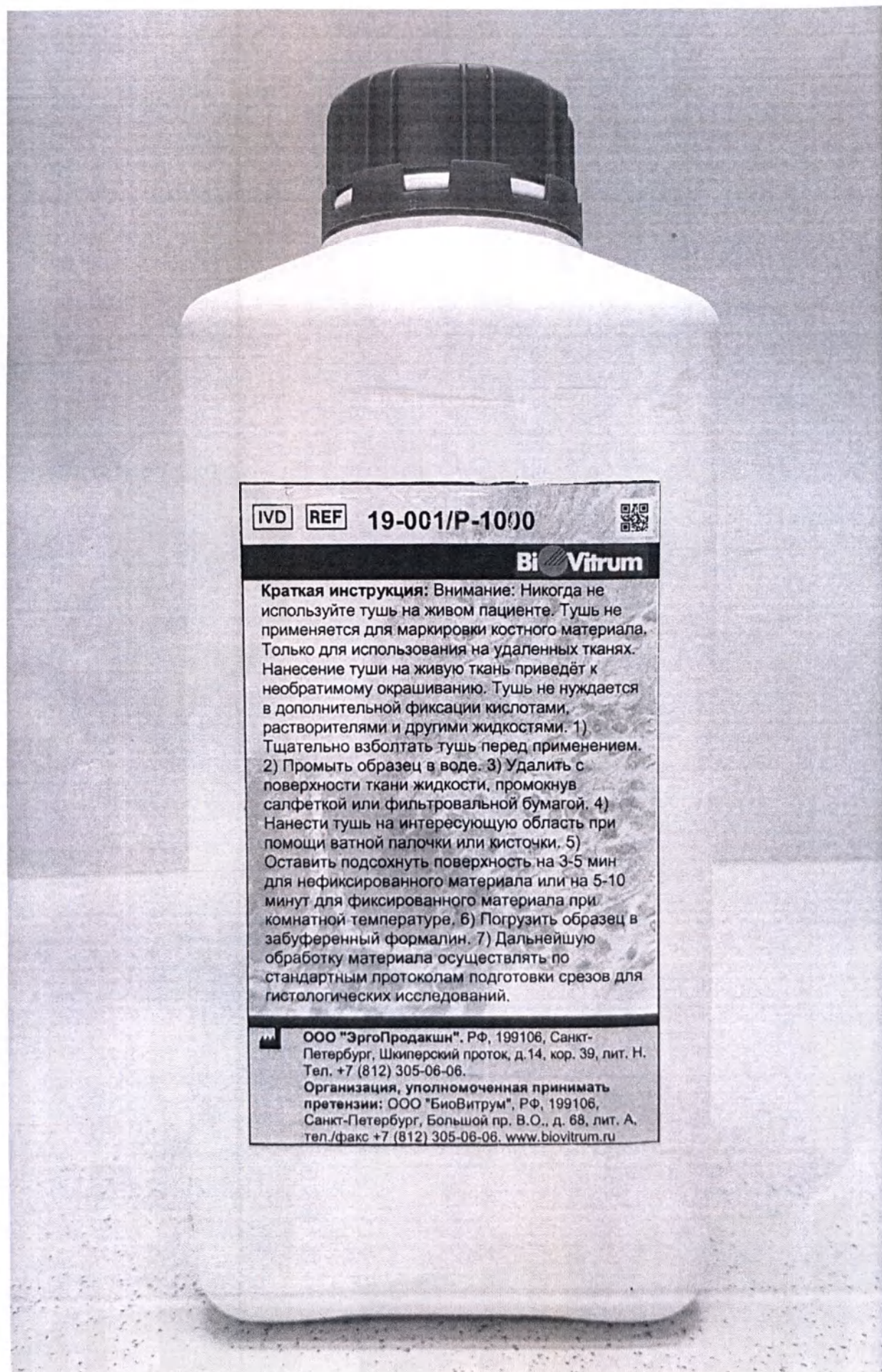

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 50 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ЭргоПродакшн»

Р.В. Аносов
2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЭргоПродакшн»



_____**Р.В. Аносов**

"08" августа 2019 г.

МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Тушь гистологическая HistoSafe®

Типы этикеток используемых в различных вариантах исполнения

При производстве МИ «Тушь гистологическая HistoSafe®» используются различные типы этикеток в зависимости от типа первичной упаковки.

При размещении информации на этикетки необходимо руководствоваться ТУ 21.20.23-008-89079081-2017.

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 30 мл

Первичная упаковка: флакон 30 мл

IVD	REF	19-001/B-30	LOT	xxxxxxx	1
Bi Vitrum					
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 30 мл					
MM.ГГГГ	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017				
MM.ГГГГ	5				
ПУ № XXXXXX от дд.мм.гггг					
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, С.-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Вторичная упаковка

IVD	REF	19-001/B-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017	 	
			Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 30 мл					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.		
MM.ГГГГ					
MM.ГГГГ					
ПУ № XXXXXX от дд.мм.гггг					
Состав: чёрная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	19-001/B-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017	
			Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 30 мл				
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	 
MM.ГГГГ			Масса нетто:	
MM.ГГГГ			Масса брутто:	
ПУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 30 мл

Первичная упаковка: флакон 30 мл

IVD	REF	19-001/BL-30	LOT	XXXXXXX	1
Bi Vitrum					
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 30 мл					
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ
По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017					
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг					
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, С.-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Вторичная упаковка

IVD	REF	19-001/BL-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017	
			Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum				
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 30 мл				
LOT	XXXXXXX		Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ			
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ			
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг		Состав: синяя пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	19-001/BL-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017	
			Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 30 мл				
LOT	XXXXXXX		Кол-во штук:	
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ		Масса нетто:	
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ		Масса брутто:	
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 30 мл

Первичная упаковка: флакон 30 мл

IVD	REF	19-001/G-30	LOT	XXXXXXX	1
Bi Vitrum					
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 30 мл					
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ
По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017					
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг					
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, С.-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Вторичная упаковка

IVD	REF	19-001/G-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum				
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 30 мл				
LOT	XXXXXXX		Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
	ММ.ГГГГ			
	ММ.ГГГГ			
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
Состав: зелёная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	19-001/G-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 30 мл				
LOT	XXXXXXX		Кол-во штук:	
	ММ.ГГГГ		Масса нетто:	
	ММ.ГГГГ		Масса брутто:	
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 30 мл

Первичная упаковка: флакон 30 мл

IVD	REF	19-001/Y-30	LOT	XXXXXXX	2
Bi Vitrum					
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 30 мл					
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017		
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	РУ № XXXXXX от дд.ММ.ГГГГ		
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, С.-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Вторичная упаковка

IVD	REF	19-001/Y-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum				
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 30 мл				
LOT	XXXXXXX		Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
	ММ.ГГГГ			
	ММ.ГГГГ			
РУ № XXXXXX от дд.ММ.ГГГГ				
Состав: жёлтая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	19-001/Y-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 30 мл				
LOT	XXXXXXX		Кол-во штук:	
	ММ.ГГГГ		Масса нетто:	
	ММ.ГГГГ		Масса брутто:	
РУ № XXXXXX от дд.ММ.ГГГГ				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 30 мл

Первичная упаковка: флакон 30 мл

IVD	REF	19-001/R-30	LOT	XXXXXXX	1
Bi Vitrum					
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 30 мл					
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ
По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017					
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг					
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, С.-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Вторичная упаковка

IVD	REF	19-001/R-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum				
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 30 мл				
LOT	XXXXXXX		Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ		
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
Состав: красная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода				
ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	19-001/R-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 30 мл				
LOT	XXXXXXX		Кол-во штук:	
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	Масса нетто:	
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	Масса брутто:	
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 30 мл

Первичная упаковка: флакон 30 мл

IVD	REF	19-001/O-30	LOT	XXXXXXX
Bi Vitrum				
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 30 мл				
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ
ПУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, С.-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Вторичная упаковка

IVD	REF	19-001/O-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum				
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 30 мл				
LOT	XXXXXXX		Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ		
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ		
ПУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
Состав: оранжевая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	19-001/O-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 30 мл				
LOT	XXXXXXX		Кол-во штук:	
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	Масса нетто:	
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	Масса брутто:	
ПУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 30 мл

Первичная упаковка: флакон 30 мл

IVD	REF	19-001/P-30	LOT	xxxxxxx	
Bi Vitrum					
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 30 мл					
	ММ.ГГГГ		По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017		
	ММ.ГГГГ				
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг					
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, С.-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Вторичная упаковка

IVD	REF	19-001/P-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum				
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 30 мл				
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
	ММ.ГГГГ			
	ММ.ГГГГ			
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
Состав: фиолетовая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	19-001/P-30	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 30 мл				
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	
	ММ.ГГГГ		Масса нетто:	
	ММ.ГГГГ		Масса брутто:	
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 60 мл

Первичная упаковка: флакон 60 мл

IVD REF 19-001/P-60

Bi Vitrum

Тушь гистологическая
HistoSafe®, цвет
черный, 60 мл

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

000 "ЭргоПродакшн"

Вторичная упаковка

IVD REF 19-001/B-60

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 60 мл

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Состав: чёрная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой. 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки. 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре. 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/B-60

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 60 мл

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Первичная упаковка: флакон 60 мл

IVD REF 19-001/BL-60

Bi Vitrum

Тушь гистологическая
HistoSafe®, цвет синий,
60 мл

По ТУ 21.20.23-008-89079081-197

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.ММ.ГГГГ

5 25

000 "ЭргоПродакшн"

Вторичная упаковка

  19-001/BL-60 	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
--	--	---

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 60 мл

LOT xxxxxxxx

 MM.GTTG

 MM.GTTG

PY № XXXXXX от дд.мм.гггг




Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями.

- 1) Тщательно взболтать тушь перед применением.
- 2) Промыть образец в воде
- 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой;
- 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки;
- 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре;
- 6) Погрузить образец в забуференный формалин.
- 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.



ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/BL-60		По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию			
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 60 мл					
LOT	XXXXXXX		Кол-во штук:		
	ММ.ГГГГ		Масса нетто:		
	ММ.ГГГГ		Масса брутто:		
РУ № XXXXXX от дд.ММ.ГГГГ					
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Первичная упаковка: флакон 60 мл

IVD REF 19-001/G-60

Bi Vitrum

Тушь гистологическая
HistoSafe®, цвет
зелёный, 60 мл

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

000 "ЭргоПродакшн"

Вторичная упаковка

IVD REF 19-001/G-60

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 60 мл

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Состав: зелёная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

000 "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/G-60

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 60 мл

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

000 "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 60 мл

Первичная упаковка: флакон 60 мл

IVD REF 19-001/Y-60

Bi Vitrum

Тушь гистологическая
HistoSafe®, цвет
жёлтый, 60 мл

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

000 "ЭргоПродакшн"

Вторичная упаковка

IVD REF 19-001/Y-60

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 60 мл

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Состав: жёлтая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением; 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/Y-60

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 60 мл

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

000 "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 60 мл

Первичная упаковка: флакон 60 мл

IVD REF 19-001/R-60

Bi Vitrum

Тушь гистологическая
HistoSafe®, цвет
красный, 60 мл

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

000 "ЭргоПродакшн"

Вторичная упаковка

IVD REF 19-001/R-60

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 60 мл

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Состав: красная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

000 "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/R-60

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 60 мл

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

000 "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 60 мл

Первичная упаковка: флакон 60 мл

IVD REF	19-001/O-60	
Bi Vitrum		
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 60 мл		
По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017		
LOT	XXXXXX	
	ММ.ГГГГ	
	ММ.ГГГГ	
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг		
ООО "ЭргоПродакшн"		

Вторичная упаковка

IVD REF	19-001/O-60	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum			
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 60 мл			
LOT	XXXXXX		Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.
	ММ.ГГГГ		
	ММ.ГГГГ		
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг			
Состав: оранжевая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF	19-001/O-60	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 60 мл			
LOT	XXXXXX	Кол-во штук:	
	ММ.ГГГГ	Масса нетто:	
	ММ.ГГГГ	Масса брутто:	
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 60 мл

Первичная упаковка: флакон 60 мл

IVD REF 19-001/P-60

Bi Vitrum

Тушь гистологическая
HistoSafe®, цвет
фиолетовый, 60 мл

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

000 "ЭргоПродакшн"

Вторичная упаковка

IVD REF 19-001/P-60

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 60 мл

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Состав: фиолетовая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

000 "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/P-60

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 60 мл

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

000 "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 250 мл

Первичная упаковка: флакон 250 мл

IVD	REF 19-001/B-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 250 мл			
LOT XXXXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ РУ № XXXXXXXX от дд.мм.гггг Состав: чёрная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода		Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF 19-001/B-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 250 мл			
LOT XXXXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ РУ № XXXXXXXX от дд.мм.гггг		Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____	
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 250 мл

Первичная упаковка: флакон 250 мл

IVD REF 19-001/BL-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum		
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 250 мл		
LOT xxxxxxxx MM.ГГГГ MM.ГГГГ РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг Состав: синяя пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода	25 Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой. 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки. 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре. 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru		

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/BL-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 250 мл		
LOT xxxxxxxx MM.ГГГГ MM.ГГГГ РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____	
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru		

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 250 мл

Первичная упаковка: флакон 250 мл

IVD	REF 19-001/G-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum			
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 250 мл			
LOT XXXXXXX	MM.ГГГГ	Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой. 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки. 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре. 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг Состав: зелёная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF 19-001/G-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 250 мл			
LOT XXXXXXX	MM.ГГГГ	Кол-во штук:	
MM.ГГГГ	MM.ГГГГ	Масса нетто:	
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг	MM.ГГГГ	Масса брутто:	
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 250 мл

Первичная упаковка: флакон 250 мл

IVD	REF 19-001/Y-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum			
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 250 мл			
LOT	XXXXXXX	Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
	ММ.ГГГГ		
	ММ.ГГГГ		
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг			
Состав: жёлтая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF 19-001/Y-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 250 мл			
LOT	XXXXXXX	Кол-во штук:	
	ММ.ГГГГ	Масса нетто:	
	ММ.ГГГГ	Масса брутто:	
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 250 мл

Первичная упаковка: флакон 250 мл

IVD	REF	19-001/R-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 250 мл				
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой. 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки. 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре. 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
	мм.гггг			
	мм.гггг			
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг Состав: красная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	19-001/R-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 250 мл				
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	
	мм.гггг		Масса нетто:	
	мм.гггг		Масса брутто:	
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 250 мл
Первичная упаковка: флакон 250 мл

IVD	REF 19-001/O-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum			
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 250 мл			
LOT xxxxxxxx	25	Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
мм.гггг	5		
мм.гггг			
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг Состав: оранжевая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF 19-001/O-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 250 мл			
LOT xxxxxxxx	25	Кол-во штук:	
мм.гггг	5	Масса нетто:	
мм.гггг		Масса брутто:	
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 250 мл
Первичная упаковка: флакон 250 мл

IVD	REF 19-001/P-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum				
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 250 мл				
LOT xxxxxxxx		25	Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой. 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки. 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре. 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.	
	MM.ГГГГ	5		
	MM.ГГГГ			
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг Состав: фиолетовая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода				
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF 19-001/P-250	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017. Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 250 мл			
LOT xxxxxxxx		25	
	MM.ГГГГ	5	
	MM.ГГГГ		
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг			
		Кол-во штук:	
		Масса нетто:	
		Масса брутто:	
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD	REF	19-001/BL-500	
Bi Vitrum			
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 500 мл			
По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию. РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг			
LOT	xxxxxxx	Состав: чёрная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода	
	ММ.гггг		
	ММ.гггг		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Оборотная этикетка

IVD	REF	19-001/BL-500	
Bi Vitrum			
Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде. 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	19-001/B-500	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 500 мл				
LOT	xxxxxxx	Кол-во штук:		
	ММ.гггг	Масса нетто:		
	ММ.гггг	Масса брутто:		
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

Оборотная этикетка

IVD REF 19-001/B-500

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 500 мл

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

LOT xxxxxxxx

мм.гггг

мм.гггг

Состав: синяя пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

IVD REF 19-001/B-500

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/BL-500

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe® цвет синий, 500 мл

LOT xxxxxxxx

мм.гггг

мм.гггг

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD REF 19-001/G-500

Bi Vitrum

Тушь гистологическая
HistoSafe®,
цвет зелёный, 500 мл

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

LOT xxxxxxxx

мм.гггг

мм.гггг

Состав: зелёная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD REF 19-001/G-500

Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/G-500

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 500 мл

LOT xxxxxxxx

мм.гггг

мм.гггг

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD REF 19-001/Y-500

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 500 мл

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

LOT xxxxxxxx

мм.гггг

мм.гггг

Состав: жёлтая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD REF 19-001/Y-500

Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/Y-500

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 500 мл

LOT xxxxxxxx

мм.гггг

мм.гггг

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD REF 19-001/O-500



Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 500 мл

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

LOT xxxxxxxx

 мм.гггг

 мм.гггг

Состав: оранжевая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода










ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD REF 19-001/O-500



Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/O-500

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию



Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет оранжевый, 500 мл

LOT xxxxxxxx

 мм.гггг

 мм.гггг



Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг





ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD REF 19-001/P-500

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 500 мл

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
ПУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

LOT xxxxxxxx

ММ.гггг

ММ.гггг

Состав: фиолетовая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD REF 19-001/P-500

Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/P-500

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 500 мл

LOT xxxxxxxx

ММ.гггг

ММ.гггг

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD	REF	19-001/B-1000	
Bi Vitrum			
Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет черный, 1 л			
По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию. ПУ № XXXXXX от дд.мм.гггг			
LOT	xxxxxxx	Состав: чёрная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода	
	мм.гггг		
	мм.гггг		
ООО "ЭргоПродакшн". Р.Ф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Р.Ф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Оборотная этикетка

IVD	REF	19-001/B-1000	
Bi Vitrum			
Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями.1) Тщательно взболтать тушь перед применением.2) Промыть образец в воде3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой;4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки;5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре;6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.			
ООО "ЭргоПродакшн". Р.Ф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Р.Ф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	19-001/B-1000	По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Тушь гистологическая HistoSafe® цвет черный, 1 л				
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	
	мм.гггг		Масса нетто:	
	мм.гггг		Масса брутто:	
ПУ № XXXXXX от дд.мм.гггг				
ООО "ЭргоПродакшн". Р.Ф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Р.Ф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD REF 19-001/BL-1000

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 1 л

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

LOT xxxxxxx

ММ.гггг

ММ.гггг

Состав: синяя пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

25

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD REF 19-001/BL-1000

Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведет к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/BL-1000

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет синий, 1 л

LOT xxxxxxx

ММ.гггг

ММ.гггг

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD REF 19-001/G-1000

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 1 л

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

LOT xxxxxxxx

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

Состав: зелёная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD REF 19-001/G-1000

Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/G-1000

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет зелёный, 1 л

LOT xxxxxxxx

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD REF 19-001/Y-1000

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет жёлтый, 1 л

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

LOT xxxxxxxx

мм.гггг

мм.гггг

Состав: жёлтая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD REF 19-001/Y-1000

Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/Y-1000

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe® цвет жёлтый, 1 л

LOT xxxxxxxx

мм.гггг

мм.гггг

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD REF 19-001/R-1000

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет красный, 1 л

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
 Для профессионального применения.
 Реагент готов к использованию.
 РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

LOT xxxxxxxx

ММ.гггг

ММ.гггг

Состав: красная пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
 Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD REF 19-001/R-1000

Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
 Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/R-1000

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
 Для профессионального применения.
 Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe® цвет красный, 1 л

LOT xxxxxxxx

ММ.гггг

ММ.гггг

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
 Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD REF 19-001/P-1000

Bi Vitrum

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 1 л

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

LOT xxxxxxxx

мм.гггг

мм.гггг

Состав: фиолетовая пигментная паста, эмульсия акрилового сополимера, аммиак, вода

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD REF 19-001/P-1000

Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: Никогда не используйте тушь на живом пациенте. Тушь не применяется для маркировки костного материала. Только для использования на удаленных тканях. Нанесение туши на живую ткань приведёт к необратимому окрашиванию. Тушь не нуждается в дополнительной фиксации кислотами, растворителями и другими жидкостями. 1) Тщательно взболтать тушь перед применением. 2) Промыть образец в воде 3) Удалить с поверхности ткани жидкости, промокнув салфеткой или фильтровальной бумагой; 4) Нанести тушь на интересующую область при помощи ватной палочки или кисточки; 5) Оставить подсохнуть поверхность на 3-5 мин для нефиксированного материала или на 5-10 минут для фиксированного материала при комнатной температуре; 6) Погрузить образец в забуференный формалин. 7) Дальнейшую обработку материала осуществлять по стандартным протоколам подготовки срезов для гистологических исследований.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF 19-001/P-1000

По ТУ 21.20.23-008-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Тушь гистологическая HistoSafe®, цвет фиолетовый, 1 л

LOT xxxxxxxx

мм.гггг

мм.гггг

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

РУ № XXXXXX от дд.мм.гггг

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 37 лист(ов)



Генеральный директор
ООО «ЭргоПродакшн»

Р.В. Аносов

2019г.