

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Арт-Синтез»



Т.Б.Елсукова
«25» января 2019 г.

Инструкция по применению
медицинского изделия

**Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные
«Арт-Синтез» в комплектах и отдельных упаковках по ТУ 9398-002-
33900836-2014**

2019

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные «Арт-Синтез» в комплектах и отдельных упаковках по ТУ 9398-002-33900836-2014

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Предназначены для применения взамен хлопчатобумажной одежды и белья при оказании лечебно-профилактической помощи, (кроме хирургических и других инвазивных процедур).

Одежда и белье могут быть использованы в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах (кроме инфекционных, кожно-венерологических, микологических, реанимационных отделений, операционных блоков), в социальных учреждениях.

Одежду и белье в комплектах и отдельных упаковках перед применением не подвергать процедуре стерилизации.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

По назначению непосредственно исходя из ситуации и необходимости, взамен хлопчатобумажной одежды и белья

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Противопоказания к применению данного изделия не выявлены.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- перед использованием по назначению нестерильный комплект освобождают от транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой потребительской упаковки.

Запрещается использовать нестерильный комплект в следующих случаях:

- если истек срок годности данной партии
- если нарушена целостность упаковки
- если упаковка находится во влажном состоянии

При отсутствии нарушений упаковку вскрывают для дальнейшего использования

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Побочных действий при использовании данного изделия не выявлены.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные «Арт-Синтез» в комплектах и отдельных упаковках по ТУ 9398-002-33900836-2014 совместимы со всеми медицинскими изделиями, в случаях, отсутствия прямого контакта с открытой раневой поверхностью.

8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ.

9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ

Влияние данного медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводилось, так как изделие не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Использовать по назначению непосредственно исходя из ситуации и необходимости

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

Не допускается подвергать процедуре стерилизации перед применением.

Перед использованием по назначению нестерильные одежду и белье в комплектах и отдельных упаковках освобождают от транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой потребительской упаковки. При отсутствии нарушений упаковку вскрывают для дальнейшего использования.

Одежда и белье медицинское одноразовое нестерильное «Арт-Синтез» в комплектах и отдельных упаковках, применяются взамен хлопчатобумажной одежды и белья в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах (кроме инфекционных, кожно-венерологических, микологических, реанимационных отделений, операционных блоков), в социальных учреждениях, в течение одной смены (или раньше до загрязнения)

- наволочка применяется для покрытия медицинского инвентаря (подушки), взамен хлопчатобумажного белья (используются не более одних суток (или подлежит замене раньше при загрязнении));

- на матрацник применяется для покрытия медицинского инвентаря (медицинского матраца), взамен хлопчатобумажного белья, (используются не более одних суток (или подлежит замене раньше при загрязнении));

- пододеяльник применяется для покрытия медицинского инвентаря (одеяла) взамен хлопчатобумажного белья, (используются не более одних суток (или подлежит замене раньше при загрязнении));

- салфетка впитывающая, салфетка медицинская применяется для обтирания медицинского оборудования или инвентаря взамен хлопчатобумажного белья, (не используется в операционной, не связана с уходом за ранами)

- пеленка впитывающая, простыня медицинская влагонепроницаемая, используются в качестве белья (взамен хлопчатобумажного белья), для покрытия постельных принадлежностей, медицинских кроватей, кушеток и пр., смена белья производится ежедневно (или раньше по мере загрязнения);

- пеленка медицинская, простыня медицинская применяется для накрытия пациента во время осмотра (терапевтического), взамен хлопчатобумажного белья. Не предназначено для использования во время хирургических операций.

- мешок медицинский защитный, покрывало на оборудование, простыня на инструментальный столик, чехол на инструментальный столик, чехол на медоборудование, карман-приемник используются взамен хлопчатобумажного белья, для покрытия медицинского оборудования и инвентаря, используются в течение одних суток (или раньше до загрязнения);

- конверт для новорожденного используется взамен хлопчатобумажной одежды и белья, для переноски одного новорожденного (новорожденный помещается внутрь конверта), используются в течение одних суток (или раньше до загрязнения);

- валик для процедур, используется для удобства проведения процедур (например может подкладываться под пациента взамен хлопчатобумажного белья, при проведении процедуры массажа в отделениях реабилитации и т.д.) используются для одного пациента в течение одних суток (или раньше до загрязнения);

- халат медицинский (с усиленной защитной зоной или без нее), одевается медперсоналом поверх спецодежды и используется взамен хлопчатобумажной одежды, в течение смены, служит защитой от загрязнений (или подлежит замене раньше при загрязнении);

- бахилы медицинские (высокие или низкие) одеваются поверх обуви или одежды медперсоналом или пациентами взамен хлопчатобумажной одежды и используются по потребности, подлежат замене при загрязнении;

- брюки медицинские, шапочка - «Шлем», Шапочка («Берет» или «Колпак»), комбинезон, куртка медицинская, одеваются медперсоналом на тело, взамен хлопчатобумажной одежды и используются в течение смены по потребности (подлежат замене при загрязнении);

- парукавики, фартук медицинский защитный одевается медперсоналом поверх спецодежды, взамен хлопчатобумажной одежды, служат дополнительной защитой от загрязнений, и используются в течение одной смены (или подлежит замене раньше при загрязнении);

- маска медицинская одевается медперсоналом или пациентами, время использования одноразовой медицинской маски составляет 3 часа, нельзя касаться закрепленной на лице маски, после снятия использованной маски нужно тщательно мыть руки с мылом, маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать рот и нос;

- накидка медицинская, тапочки медицинские одеваются пациентами или посетителями поверх одежды, взамен хлопчатобумажной одежды, используются по потребности в течение одних суток (или раньше до загрязнения);

- чехол на конечности пациента одевается на тело (нижние конечности) пациента, взамен хлопчатобумажной одежды, используются по потребности в течение одних суток (или раньше до загрязнения);

- рубашка для новорожденного, шапочка для новорожденного используются в акушерских, педиатрических отделениях, одеваются на тело новорожденного взамен хлопчатобумажной одежды, используются в течение одних суток (или раньше до загрязнения);

- рубашка для роженицы (для пациента), трусики процедурные используются в акушерских и других отделениях, одеваются на тело пациентов, взамен хлопчатобумажной одежды, используются в течение одних суток (или раньше до загрязнения);

11. СРОК СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ) И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ)

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок годности изделий - 5 лет с даты изготовления.

Не использовать после окончания срока годности.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, кроме не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000 и правилами, утвержденными в установленном порядке для каждого вида транспорта.

Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем.

Условия транспортирования - по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +5°C до +40°C.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

13. УКАЗАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хранить в местах недоступных для детей.

Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

14. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Не использованные одежду и белье медицинские одноразовые нестерильные «Арт-Синтез» в комплектах и отдельных упаковках, специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют.

15. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Синтез»

Юридический и фактический адрес: РФ, 623784, Свердловская обл., Артемовский р-н, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д.34, телефон: (343)221-47-07, факс: (343)221-47-07, e-mail: asintez@list.ru
Адрес места производства:

РФ, 623784, Свердловская обл., Артемовский р-н, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д.34

16. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Состав изделий в комплектах и их исполнение:

Е Состав изделий в комплектах и их исполнение

Комплект белья медицинского из нетканых материалов, одноразовый нестерильный «Арт-Синтез»	
1	Валик для процедур (длина х ширина х высота в см: (9,0-55,0)х(6,5-55,0)х(3,5-65,0), (55,0-110,0)х(9,0-110,0)х(3,5-65,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
2	Карман-приемник 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный (длина х ширина в см: (15,0-120,0)х(15,0-85,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
3	Конверт для новорожденного (длина х ширина х высота в см: (36,0-81,0)х(24,0-52,0)х(1,5-6,5), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
4	Мешок медицинский защитный (длина х ширина в см: (20,0-55,0)х(20,0-55,0), (55,0-110,0)х(20,0-110,0), (110,0-280,0)х(45,0-290,0) производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
5	Наволочка (длина х ширина в см: (9,0-95,0)х(9,0-95,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
6	Наматрачник (длина х ширина в см.: (85,0-120,0)х(45,0-120,0), (120,0-220,0)х(75,0-180,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
7	Пеленка впитывающая (длина х ширина в см:(35,0-220,0)х(15,0-220,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
8	Пеленка медицинская (длина х ширина в см:(35,0-220,0)х(15,0-220,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
9	Пододеяльник (длина х ширина в см:(85,0-130,0) х (45,0-95,0), (130,0-230,0)х(75,0-190,0), (230,0-260,0)х90,0-190,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
10	Покрывало на оборудование (длина х ширина в см: (310,0-330,0)х(190,0-210), (190-170,0)х(90,0-110,0), (200,0-220,0)х(130,0-150,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
11	Простыня медицинская влагопроницаемая (длина х ширина в см: (65,0-220,0)х(25,0-220,0), (220,0-400,0)х(55,0-360,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
12	Простыня медицинская (длина х ширина в см: (65,0-220,0)х(25,0-220,0), (220,0-400,0)х(55,0-360,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
13	Простыня на инструментальный столик (длина х ширина в см: (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)х(65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
14	Салфетка впитывающая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
15	Салфетка медицинская (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
16	Чехол на инструментальный столик (длина х ширина в см: (45,0-190,0)х(45,0-190,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
17	Чехол на медоборудование (длина х ширина в см: (4,5-390,0)х(4,5-390,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
Комплект одежды медицинской из нетканых материалов, одноразовый нестерильный «Арт-Синтез»	
1	Бахилы медицинские высокие (высота х длина ступни в см: (35,0-110,0)х(15,0-60,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1пара;

2	Бахилы медицинские низкие (высота х длина в см: (5,5-7,5)х(5,5-50,0), (7,5-35,0)х(8,5-50,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1пара;
3	Брюки медицинские, размером от 32 до 86, 100, производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.
4	Комбинезон (длиной 170-190см.), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
5	Куртка медицинская, размером от 32 до 86,100, производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
6	Маска медицинская 3-х слойная (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая РУ№ФСР 2010/08512, производства ООО «МАСКА», Россия -1шт.);
7	Накидка медицинская (длина х ширина в см:(35,0-95,0)х(35,0-120,0), (90,0-180,0)х(55,0-180,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
8	Нарукавники (длина в см: 35,0-55,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1пара.;
9	Рубашка для новорожденного (размером от 1 до 2; длина в см: 20,0-31,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
10	Рубашка для роженицы (для пациента) (размером от 1 до 7; длина в см: 65,0-170,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
11	Тапочки медицинские (длина в см: 25,0-49,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1пара.;
12	Трусики процедурные (размером от 1 до 4, высота в см: 26,0-39,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
13	Фартук медицинский защитный (длина х ширина в см (45,0-95,0) х (55,0-85,0), (90,0-180,0) х (65,0-150,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
14	Халат медицинский (с усиленной защитной зоной или без нее) размером от 32 до 70, производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
15	Чехол на конечности пациента (высота х длина в см: (15,0-19,0) х (11,0-30,0), (18,0-170,0) х (15,0-95,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1пара.;
16	Шапочка- «Шлем» (высота в см: 30,0-42,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
17	Шапочка «Берет» (высота в см:(10,0-22,0), диаметр (25,0-65,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
18	Шапочка «Колпак» (высота в см: (10,0-30,0), диаметр (10,0-26,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
19	Шапочка для новорожденного (высота в см: 06,0-14,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;

Состав изделий в отдельных упаковках:

1	Бахилы медицинские высокие (высота х длина ступни в см: (35,0-110,0)х(15,0-60,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1пара
2	Бахилы медицинские низкие (высота х длина в см: (5,5-7,5)х(5,5-50,0), (7,5-35,0)х(8,5-50,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1пара;
3	Брюки медицинские, размером от 32 до 86, 100, производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.
4	Валик для процедур (длина х ширина х высота в см: (9,0-55,0)х(6,5-55,0)х(3,5-65,0), (55,0-110,0)х(9,0-110,0)х(3,5-65,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
5	Карман-приемник 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный (длина х ширина в см: (15,0-120,0)х(15,0-85,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
6	Комбинезон (длиной 170-190см.), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
7	Конверт для новорожденного (длина х ширина х высота в см: (36,0-81,0)х(24,0-52,0)х(1,5-6,5), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
8	Куртка медицинская, размером от 32 до 86,100, производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
9	Мешок медицинский защитный (длина х ширина в см: (20,0-55,0)х(20,0-55,0), (55,0-110,0)х(20,0-110,0), (110,0-280,0)х(45,0-290,0) производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
10	Наволочка (длина х ширина в см: (9,0-95,0)х(9,0-95,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
11	Накидка медицинская (длина х ширина в см:(35,0-95,0)х(35,0-120,0), (90,0-180,0)х(55,0-180,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
12	Наматрачник (длина х ширина в см.: (85,0-120,0)х(45,0-120,0), (120,0-220,0)х(75,0-180,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
13	Нарукавники (длина в см: 35,0-55,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1пара.;
14	Пеленка впитывающая (длина х ширина в см:(35,0-220,0)х(15,0-220,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
15	Пеленка медицинская (длина х ширина в см:(35,0-220,0)х(15,0-220,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
16	Подогреватель (длина х ширина в см:(85,0-130,0) х (45,0-95,0), (130,0-230,0)х(75,0-190,0), (230,0-260,0)х(90,0-190,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
17	Покрывало на оборудование (длина х ширина в см: (310,0-330,0)х(190,0-210), (190-170,0)х(90,0-110,0), (200,0-220,0)х(130,0-150,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
18	Простыня медицинская влагонепроницаемая (длина х ширина в см: (65,0-220,0)х(25,0-220,0), (220,0-400,0)х(55,0-360,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
19	Простыня медицинская (длина х ширина в см: (65,0-220,0)х(25,0-220,0), (220,0-400,0)х(55,0-360,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
20	Простыня на инструментальный столик (длина х ширина в см: (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)х (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
21	Рубашка для новорожденного (размером от 1 до 2; длина в см: 20,0-31,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
22	Рубашка для роженицы (для пациента) (размером от 1 до 7; длина в см: 65,0-170,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;

	Синтез», Россия -1шт.;
23	Салфетка впитывающая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
24	Салфетка медицинская (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
25	Тапочки медицинские (длина в см: 25,0-49,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1пара.;
26	Трусики процедурные (размером от 1 до 4, высота в см: 26,0-39,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
27	Фартук медицинский защитный (длина х ширина в см (45,0-95,0) х (55,0-85,0), (90,0-180,0) х (65,0-150,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
28	Халат медицинский без усиленной защитной зоны, размером от 32 до70, производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
29	Халат медицинский с усиленной защитной зоной, размером от 32 до70, производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
30	Чехол на инструментальный столик (длина х ширина в см: (45,0-190,0)х(45,0-190,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
31	Чехол на конечности пациента (высота х длина в см: (15,0-19,0) х (11,0-30,0), (18,0-170,0) х (15,0-95,0), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1пара.;
32	Чехол на медоборудование (длина х ширина в см: (4,5-390,0)х(4,5-390,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
33	Шапочка «Берет» (высота в см:(10,0-22,0), диаметр (25,0-65,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
34	Шапочка «Колпак» (высота в см: (10,0-30,0), диаметр (10,0-26,0)), производства ООО «Арт-Синтез», Россия -1шт.;
35	Шапочка- «Шлем» (высота в см: 30,0-42,0), производства ООО «Арт-Синтез» Россия -1шт.
36	Шапочка для новорожденного (высота в см: 6,0-14,0), производства ООО «Арт-Синтез» Россия -1шт.

17. ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО ПРИМЕНИМОСТИ)

17.1 Изделия выпускаются нестерильными.

Маркировка:

Каждая потребительская упаковка должна быть снабжена товарной этикеткой, на которой печатным способом должно быть указано:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес;
- обозначение настоящих технических условий;
- наименование изделия, размеры изделия с указанием материалов и количеством изделий (для изделий в отдельных упаковках);
- наименование комплекта, состав комплекта, размеры изделий с указанием материалов, входящих в комплект и количеством изделий (для изделий в комплектах);
- назначение;
- надпись «нестерильно», выделенная крупным шрифтом или другим цветом;
- надпись о недопустимости применения в случае нарушения целостности потребительской тары;
- номер партии;
- слова «годен до...» (месяц и год);
- условия хранения;
- условия утилизации;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- штрих-код (при наличии).

Примечание – Допускается наносить на упаковку графические символы и рисунки, поясняющие условия хранения изделий, их утилизацию и т.п.

На групповой таре изделий типографским способом должно быть указано:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес;
- наименование комплекта, состав комплекта и размеры изделий, входящих в комплект (для изделий в комплектах);
- количество изделий в комплектах и количество комплектов (для изделий в комплектах);
- наименование изделия и размеры изделия (для изделий в отдельных упаковках);
- количество изделий (для изделий в отдельных упаковках);
- надпись «нестерильно», выделенная крупным шрифтом или другим цветом;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и две последние цифры года);
- годен до (месяц и две последние цифры года);
- условия хранения;
- масса брутто;
- штамп ОТК.

На упаковочном листе, вложенном в каждую транспортную тару должно быть указано:

- 1) наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак, адрес;
- 2) наименование комплекта, состав комплекта и размеры изделий, входящих в комплект (для изделий в комплектах);
- 3) количество изделий в комплектах и количество комплектов (для изделий в комплектах);

- 4) наименование изделия и размеры изделия (для изделий в отдельных упаковках);
- 5) количество изделий (для изделий в отдельных упаковках);
- 6) номер и фамилия упаковщика и дата упаковывания.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192. На поверхности транспортной тары должны быть нанесены манипуляционные знаки «Беречь от влаги». Допускается наклеивание манипуляционных знаков, выполненных типографским способом.

Упаковка:

Изделия должны быть упакованы в потребительскую упаковку, представляющую собой герметичные полиэтиленовые пакеты, выполненные из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354, толщиной не менее 40 мкм.

Потребительские упаковки должны быть уложены в групповую упаковку (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

Групповые упаковки должны быть уложены в транспортную тару (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или по ГОСТ Р 54463. Транспортная тара с комплектами должна быть оклеена лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

Примечание: Допускается в транспортную упаковку укладывать изделия в потребительских упаковках.

Масса брутто одного места должна быть не более 20 кг.

Примечание: допускается, по согласованию с заказчиком, применять для упаковки изделий другие виды материалов, обеспечивающих их сохранность и разрешенных к применению в установленном порядке.

17.2 В состав комплектов входят Изделия контурной и прямоугольной формы, изготовлены из нетканых полотен типа Спан-мелт-спан (СМС), Вуденпалп, Спанлейс, ламинированный Спанлейс, ламинированный Спанбонд, Сантейс.

17.3. Общий вид изделий (рисунки 1 – 31)

Рисунок 1. Халат медицинский (с усиленной защитной зоной или без нее). Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.01».

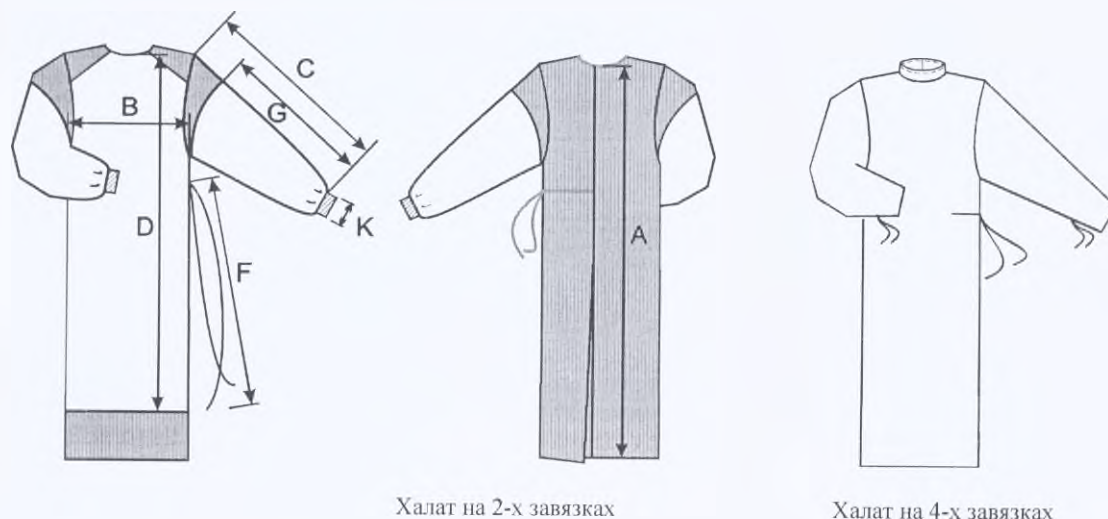


Рисунок 2. Куртка медицинская. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.02».

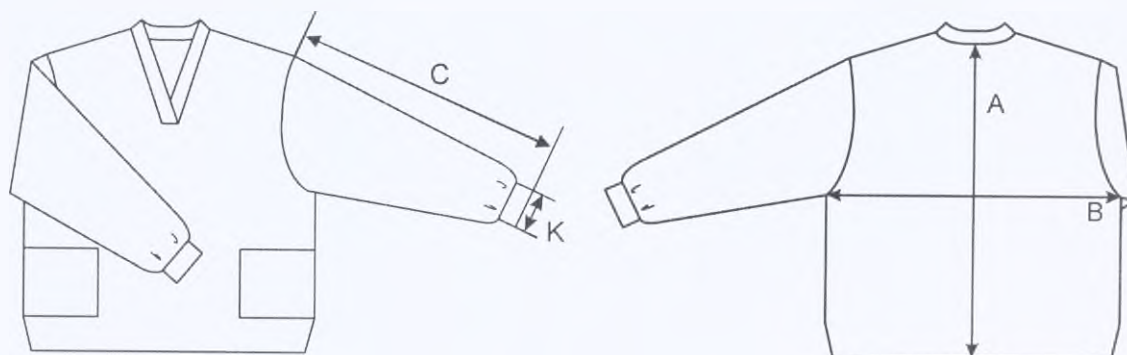


Рисунок 3. Брюки медицинские. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.03».

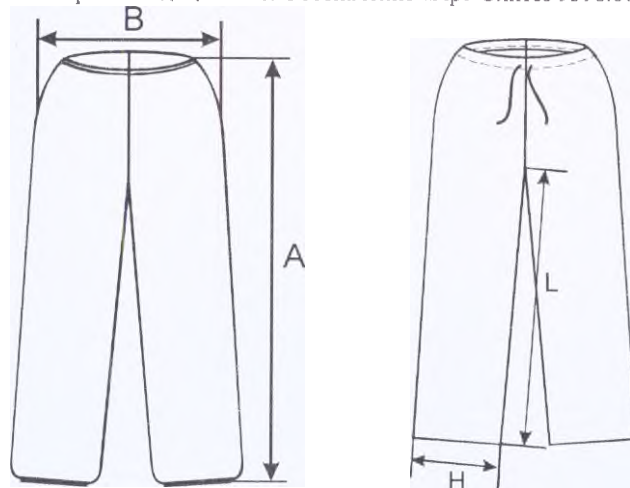


Рисунок 4. Комбинезон. Обозначение «Арт-Синтез 9398.005.04».

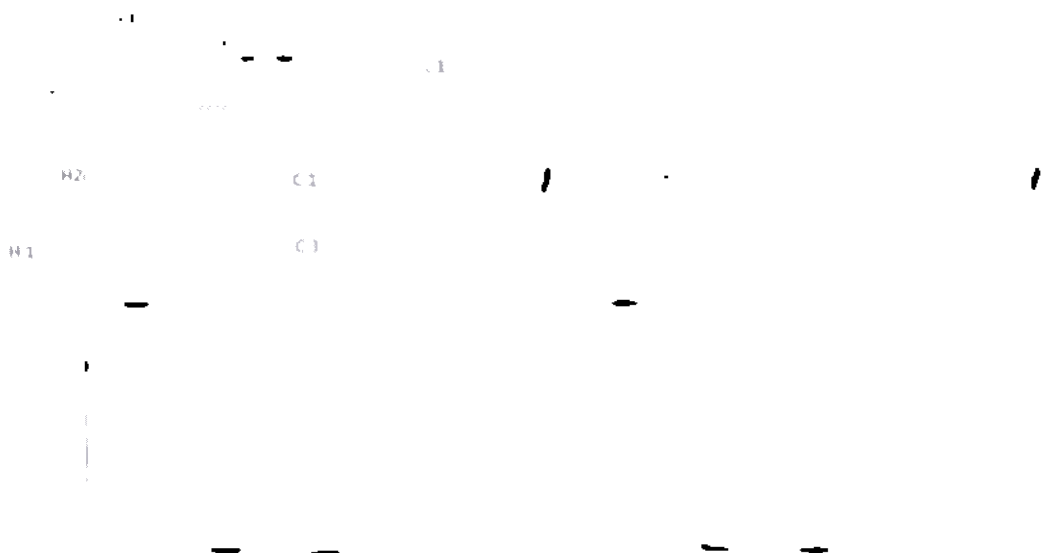


Рисунок 5. Фартук медицинский защитный Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.05»

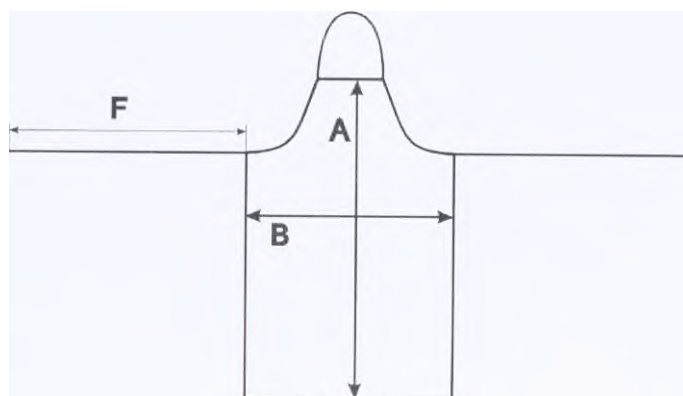


Рисунок 6. Шапочка «Колпак», Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.06».

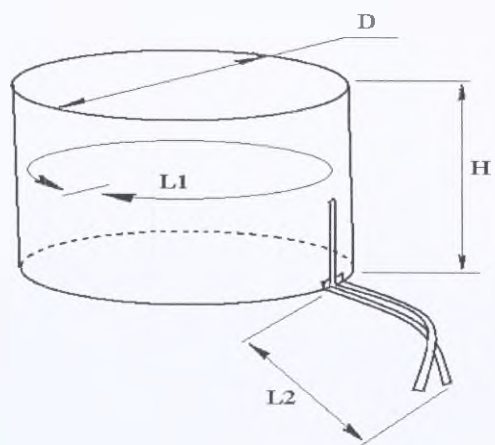


Рисунок 7. Шапочка «Берет». Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.07».

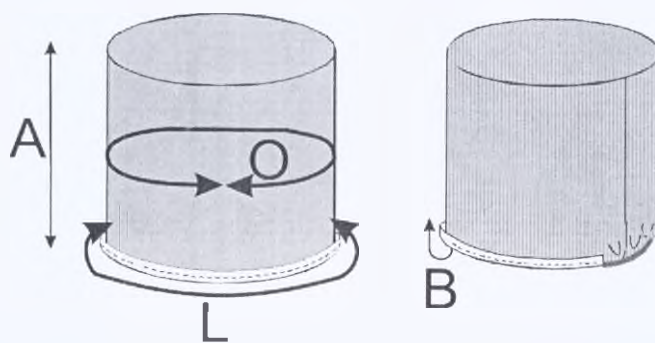


Рисунок 8. Шапочка «Шлем». Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.08».

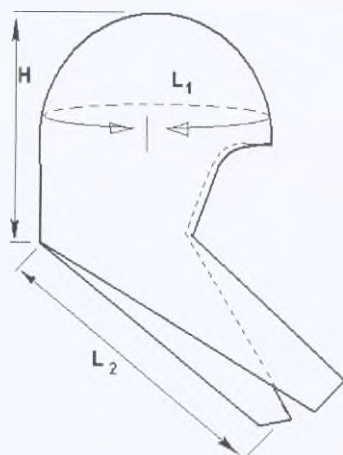


Рисунок 9. Шапочка «Шапочка для новорожденного». Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.9».

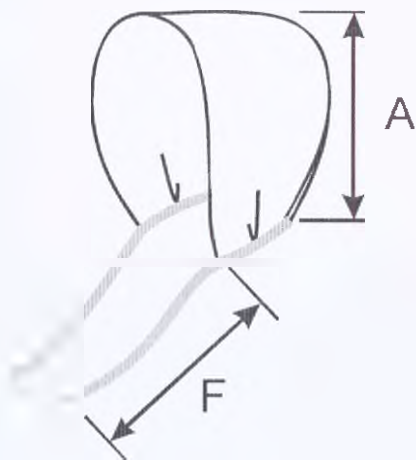


Рисунок 10. Бахилы медицинские низкие. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.10».

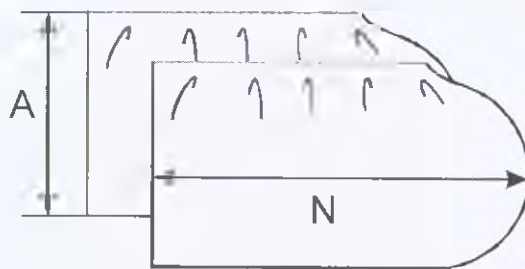


Рисунок 11. Бахилы медицинские высокие. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.11».

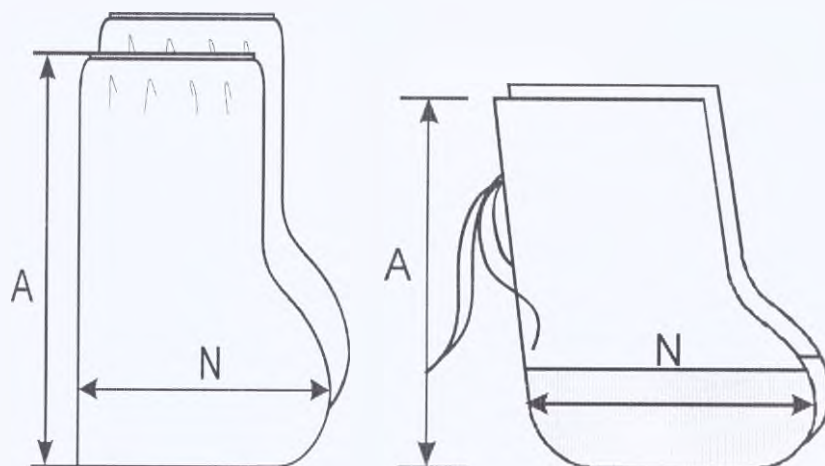


Рисунок 12. Чехол на конечности пациента. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.12».

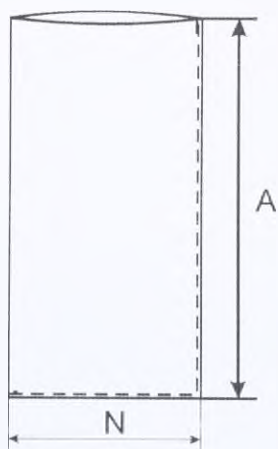


Рисунок 13 Парукавники. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.13»

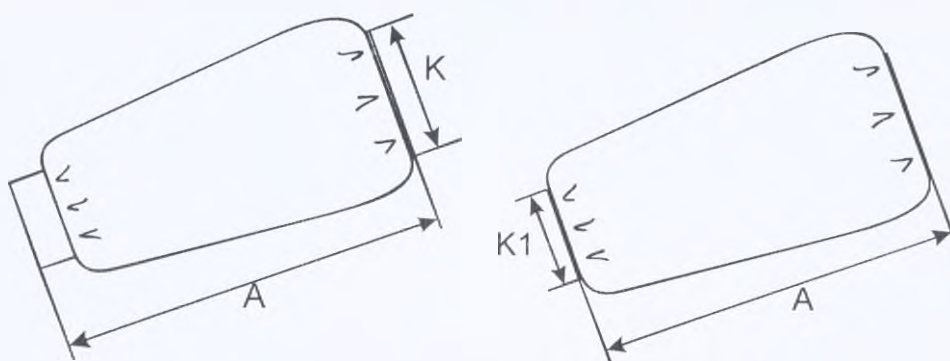


Рисунок 14. Рубашка для роженицы (для пациента). Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.14»

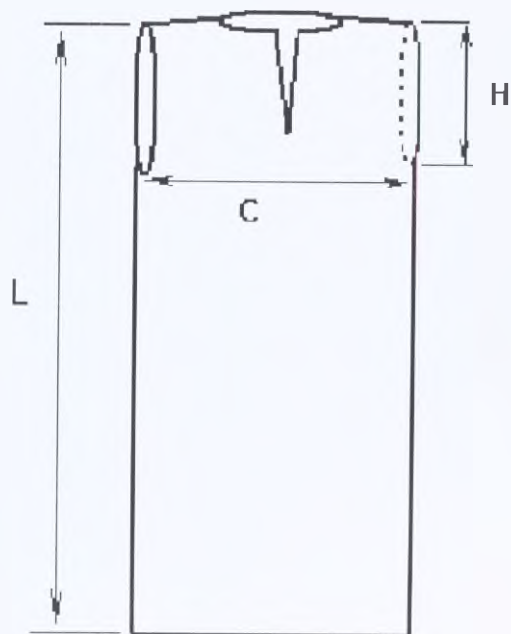


Рисунок 15. Рубашка для новорожденного. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.15».

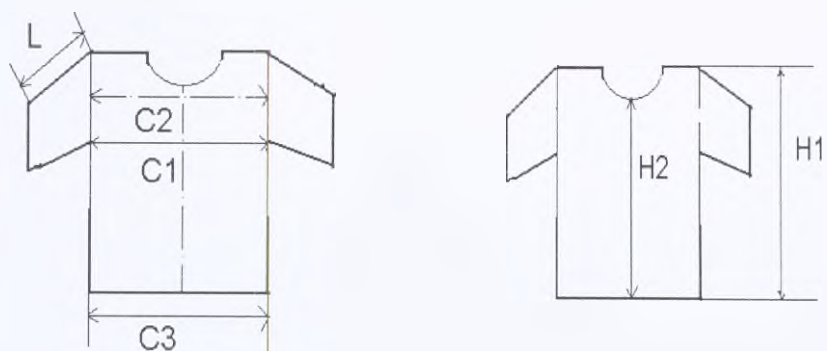


Рисунок 16. Трусики процедурные. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.16».

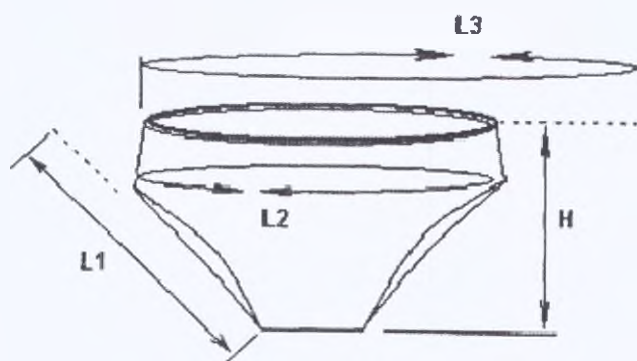


Рисунок 17. Накидка медицинская. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.17».

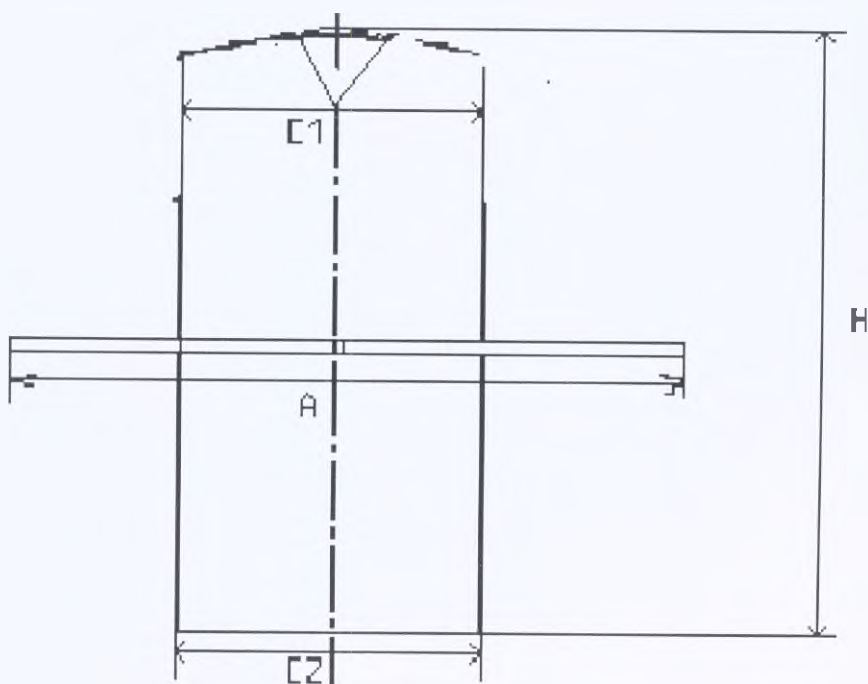


Рисунок 18. Простыня медицинская влагонепроницаемая. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.18».

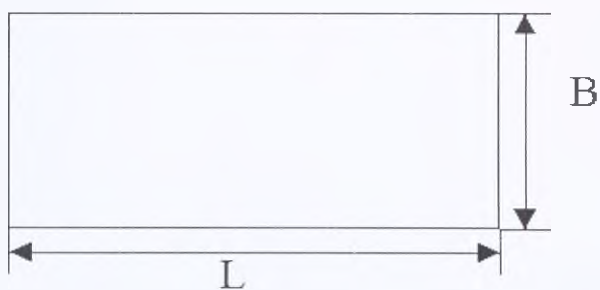


Рисунок 19. Пододульник. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.19».

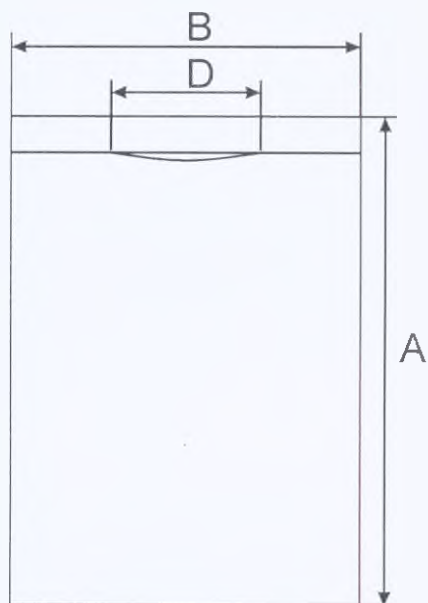


Рисунок 20. Наволочка. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.20».

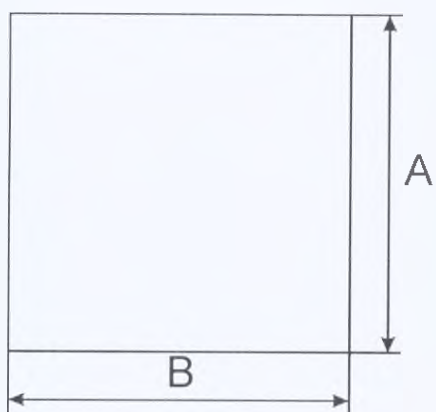


Рисунок 21. Наматрачник. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.21».

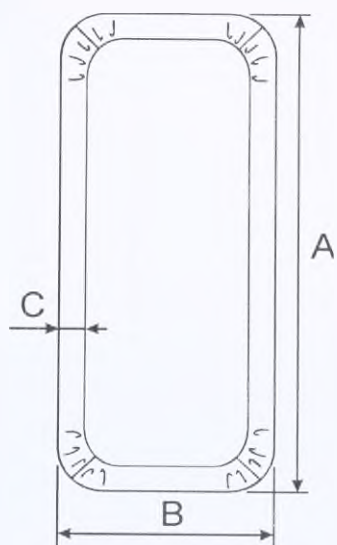


Рисунок 22 Простыня медицинская. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.22»

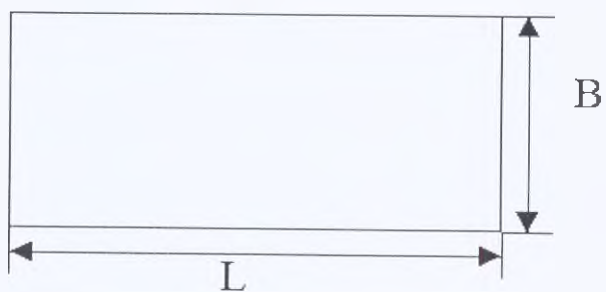


Рисунок 23. Чехол на инструментальный столик. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.23».
Чехол на медоборудование. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.24».

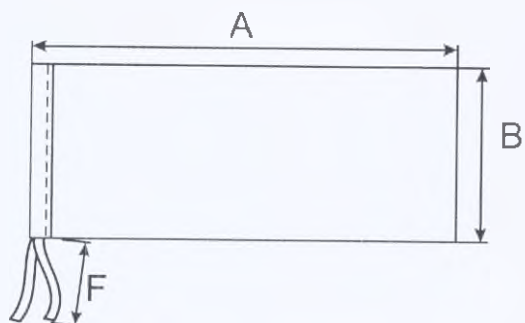


Рисунок 24. Мешок медицинский защитный. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.25»

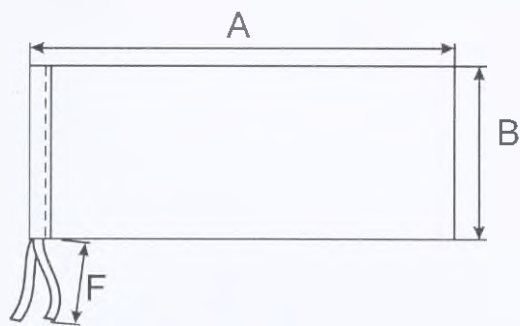


Рисунок 25. Конверт для новорожденного Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.26»

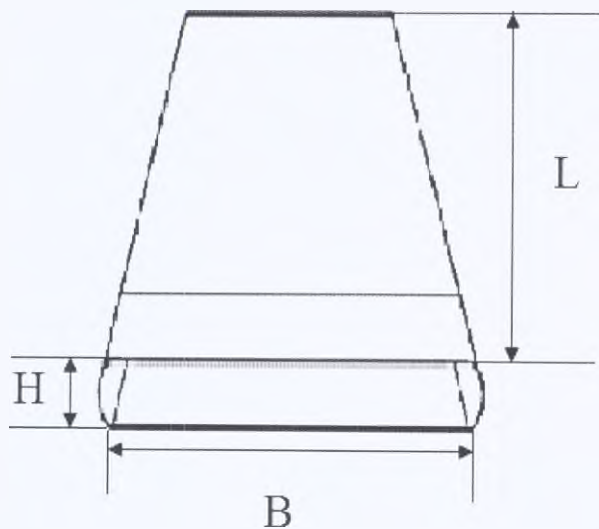


Рисунок 26. Салфетка впитывающая. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.27».

Салфетка медицинская. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.28».

Покрывало на оборудование Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.29».

Пеленка впитывающая. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.30».

Пеленка медицинская. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.31».

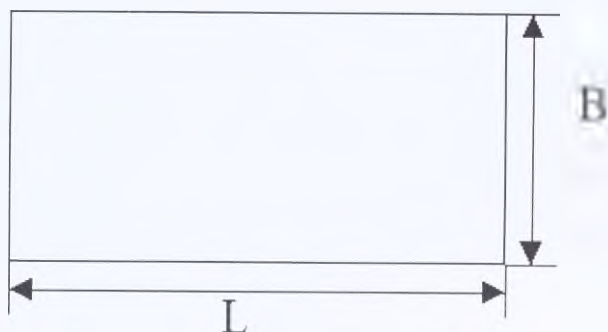


Рисунок 27. Карман-присмник. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.32».

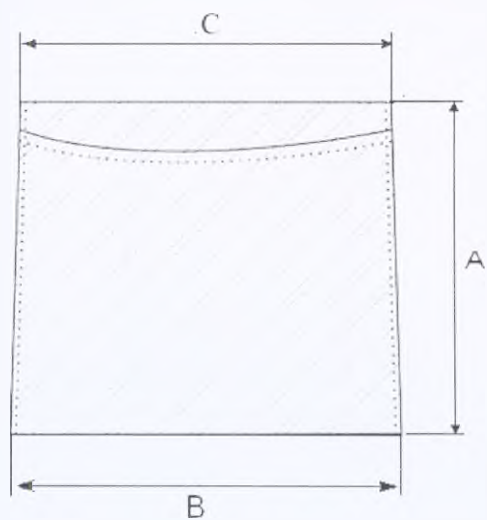


Рисунок 28. Тапочки медицинские. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.33».

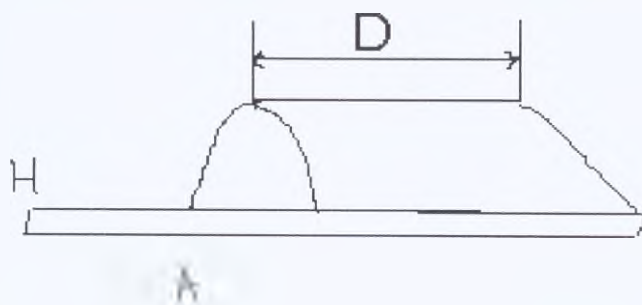


Рисунок 29. Валик для процедур. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.34».

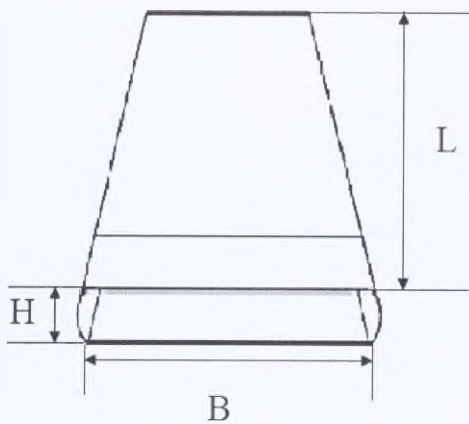


Рисунок 30. Простыня на инструментальный столик. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.35».


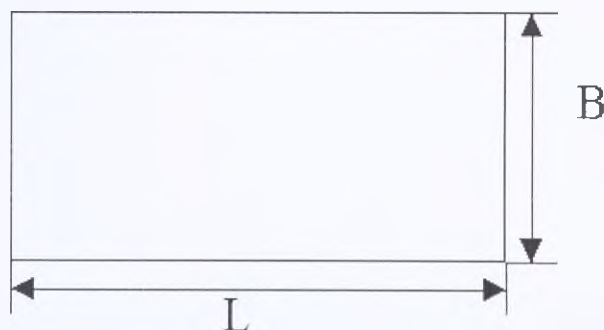


Рисунок 31. Маска медицинская

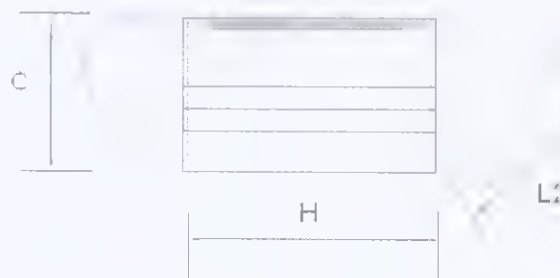

17.4. Основные линейные размеры изделий должны соответствовать обозначению «Арт-Синтез 9398.002.XX» и требованиям, представленным в таблицах 1 – 36.

Таблица 1 (к рисунку 1).

Халат медицинский (с усиленной защитной зоной, т.е. - ламинированы перед халата и рукава, или без нее). Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.XX».

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина защитной зоны (D), см (при наличии)	Длина рукава (С), см	Длина защитной зоны рукава (G), см (при наличии)	Ширина рукава внизу (K), см	Длина завязок (F), см
32-34	70,0±10,0	30,0±5,0	65,0±10,0	22,0±5,0	22,0±5,0	10,0±2,0	не менее 15,0
	90,0±10,0		75,0±10,0	32,0±5,0	32,0±5,0		
	110,0±10,0		95,0±10,0	42,0±5,0	42,0±5,0		
				52,0±5,0	52,0±5,0		
36-38	70,0±10,0	40,0±5,0	65,0±10,0	22,0±5,0	22,0±5,0	10,0±2,0	не менее 15,0
	90,0±10,0		75,0±10,0	32,0±5,0	32,0±5,0		
	110,0±10,0		95,0±10,0	42,0±5,0	42,0±5,0		
				52,0±5,0	52,0±5,0		
40-42	90,0±10,0	50,0±5,0	65,0±10,0	52,0±5,0; 62,0±5,0;	22,0±5,0	12,0±2,0	не менее 15,0
	110,0±10,0		75,0±10,0		32,0±5,0		
	130,0±10,0		95,0±10,0		42,0±5,0		
	150,0±10,0		115,0±10,0		52,0±5,0		
			135,0±10,0		62,0±5,0		
44-46	90,0±10,0	60,0±5,0;	65,0±10,0	52,0±5,0; 62,0±5,0;	22,0±5,0	12,0±2,0	не менее 15,0
	110,0±10,0		75,0±10,0		32,0±5,0		
	130,0±10,0		95,0±10,0		42,0±5,0		
	150,0±10,0		115,0±10,0		52,0±5,0		
			135,0±10,0		62,0±5,0		
48-50	90,0±10,0	70,0±5,0;	65,0±10,0	52,0±5,0; 62,0±5,0; 72,0±5,0	22,0±5,0	12,0±2,0	не менее 15,0
	110,0±10,0		75,0±10,0		32,0±5,0		
	130,0±10,0		95,0±10,0		42,0±5,0		
	150,0±10,0		115,0±10,0		52,0±5,0		
	170,0±10,0		135,0±10,0		62,0±5,0		
			150,0±10,0		72,0±5,0		
			170,0±10,0				

52-54	90,0±10,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0	75,0±5,0;	65,0±10,0 75,0±10,0 95,0±10,0 115,0±10,0 135,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0	52,0±5,0; 62,0±5,0; 72,0±5,0	22,0±5,0 32,0±5,0 42,0±5,0 52,0±5,0 62,0±5,0 72,0±5,0	12,0±2,0	не менее 15,0
56-58	90,0±10,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0	80,0±5,0	65,0±10,0 75,0±10,0 95,0±10,0 115,0±10,0 135,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0	52,0±5,0; 62,0±5,0; 72,0±5,0	22,0±5,0 32,0±5,0 42,0±5,0 52,0±5,0 62,0±5,0 72,0±5,0	12,0±2,0	не менее 15,0
60-62	90,0±10,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0	85,0±5,0	65,0±10,0 75,0±10,0 95,0±10,0 115,0±10,0 135,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0	52,0±5,0; 62,0±5,0; 72,0±5,0	22,0±5,0 32,0±5,0 42,0±5,0 52,0±5,0 62,0±5,0 72,0±5,0	12,0±2,0	не менее 15,0
64-66	110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0	90,0±10,0	65,0±10,0 75,0±10,0 95,0±10,0 115,0±10,0 135,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0	52,0±5,0; 62,0±5,0; 72,0±5,0	22,0±5,0 32,0±5,0 42,0±5,0 52,0±5,0 62,0±5,0 72,0±5,0	14,0±2,0	не менее 15,0
68-70	110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0	95,0±10,0	65,0±10,0 75,0±10,0 95,0±10,0 115,0±10,0 135,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0	52,0±5,0; 62,0±5,0; 72,0±5,0	22,0±5,0 32,0±5,0 42,0±5,0 52,0±5,0 62,0±5,0 72,0±5,0	14,0±2,0	не менее 15,0

Таблица 2 (к рисунку 2).

Куртка медицинская. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.02».

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см		Ширина рукава внизу (К), см
			длинного	короткого	
32-34	50,0±10,0 60,0±10,0	40,0±5,0	42,0±5,0	12,0±5,0 22,0±5,0	6,0±2,0
36-38	50,0±10,0 60,0±10,0	45,0±5,0	42,0±5,0	12,0±5,0 22,0±5,0	8,0±2,0
40-42	60,0±10,0 80,0±10,0	50,0±5,0	52,0±5,0 62,0±5,0	22,0±5,0 32,0±5,0 42,0±5,0	10,0±2,0
44-46	60,0±10,0 80,0±10,0	55,0±5,0	52,0±5,0 62,0±5,0	22,0±5,0 32,0±5,0 42,0±5,0	10,0±2,0
48-50	60,0±10,0 80,0±10,0	60,0±5,0	62,0±5,0 72,0±5,0	32,0±5,0 42,0±5,0	10,0±2,0
52-54	60,0±10,0 80,0±10,0	65,0±5,0	62,0±5,0 72,0±5,0	32,0±5,0 42,0±5,0	12,0±2,0
56-58	60,0±10,0 80,0±10,0 100,0±10,0	70,0±5,0	62,0±5,0 72,0±5,0	32,0±5,0 42,0±5,0	12,0±2,0
60-62	60,0±10,0 80,0±10,0 100,0±10,0	75,0±5,0	62,0±5,0 72,0±5,0	32,0±5,0 42,0±5,0	12,0±2,0
64-66	80,0±10,0 100,0±10,0	80,0±5,0	72,0±5,0	32,0±5,0 42,0±5,0	14,0±2,0
68-70	80,0±10,0 100,0±10,0	85,0±5,0	72,0±5,0	32,0±5,0 42,0±5,0	14,0±2,0

72-74	80,0±10,0 100,0±10,0	90,0±5,0	72,0±5,0	32,0±5,0 42,0±5,0	14,0±2,0
76-78	80,0±10,0 100,0±10,0	92,0±5,0	72,0±5,0	32,0±5,0 42,0±5,0	14,0±2,0
80-82	80,0±10,0 100,0±10,0 120,0±10,0	95,0±5,0	72,0±5,0	32,0±5,0 42,0±5,0	18,0±2,0
84-86	80,0±10,0 100,0±10,0 120,0±10,0	98,0±8,0	72,0±5,0	32,0±5,0 42,0±5,0	18,0±2,0
100	80,0±10,0 100,0±10,0 120,0±10,0	100,0±10,0	72,0±5,0	32,0±5,0 42,0±5,0	18,0±2,0

Таблица 3 (к рисунку 3).

Брюки медицинские. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.03».

Размер	Длина изделия (А), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина изделия (В), см	Ширина брѳков внизу (Н), см
32-34	40,0±10,0	35,0±5,0	40,0±5,0	15,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
36-38	40,0±10,0	35,0±5,0	45,0±5,0	20,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
40-42	40,0±10,0	35,0±5,0	50,0±5,0	20,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		
	120,0±10,0	85,0±5,0		
44-46	40,0±10,0	35,0±5,0	55,0±5,0	20,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		
	120,0±10,0	85,0±5,0		
48-50	40,0±10,0	35,0±5,0	60,0±5,0	25,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		
	120,0±10,0	85,0±5,0		
52-54	40,0±10,0	35,0±5,0	65,0±5,0	25,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		
	120,0±10,0	85,0±5,0		
56-58	40,0±10,0	35,0±5,0	75,0±5,0	25,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		
	120,0±10,0	85,0±5,0		
60-62	40,0±10,0	35,0±5,0	85,0±5,0	30,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		

	120,0±10,0	85,0±5,0		
64-70	40,0±10,0	35,0±5,0	90,0±5,0	30,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		
	120,0±10,0	85,0±5,0		
72-74	40,0±10,0	35,0±5,0	92,0±5,0	35,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		
	120,0±10,0	85,0±5,0		
76-78	40,0±10,0	35,0±5,0	94,0±5,0	35,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		
	120,0±10,0	85,0±5,0		
80-82	40,0±10,0	35,0±5,0	96,0±5,0	35,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		
	120,0±10,0	85,0±5,0		
84-86	40,0±10,0	35,0±5,0	98,0±5,0	35,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		
	120,0±10,0	85,0±5,0		
100	40,0±10,0	35,0±5,0	100,0±10,0	40,0±5,0
	60,0±10,0	50,0±5,0		
	80,0±10,0	55,0±5,0		
	100,0±10,0	65,0±5,0		
	120,0±10,0	85,0±5,0		
	130,0±10,0	95,0±5,0		

Таблица 4 (к рисунку 4).

Комбинезон. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.04».

Длина изделия (от шеи до голеностопного сустава) (Н1), см	180,0 ± 10,0
Длина переда от середины горловины до промежности (Н2), см	85,0 ± 5,0
Длина по шаговому шву (Н3), см	85,0 ± 5,0
Ширина переда на уровне глубины проймы (С1), см	82,0 ± 5,0
Ширина спинки (С2), см	84,0 ± 5,0
Ширина в талии (С3), см	82,0 ± 5,0
Ширина внизу (С4), см	33,0 ± 3,0
Длина рукава от высокой точки оката до низа (L1), см	83,0 ± 5,0
Высота стенки капюшона (Н4), см (при наличии)	40,0 ± 4,0
Длина внутренней окружности капюшона (L2), см (при наличии)	54,0 ± 5,0

Таблица 5 (к рисунку 5)

Фартук медицинский одноразовый. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.05»

Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина завязок (F), см
50,0±5,0	60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0	не менее 20,0
60,0±5,0	60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0	не менее 20,0
70,0±5,0	60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0	не менее 20,0
80,0±5,0	60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0	не менее 20,0
90,0±5,0	60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0	не менее 20,0

100,0±10,0	70,0±5,0;80,0±5,0;90,0±5,0	не менее 20,0
110,0±10,0	70,0±5,0;80,0±5,0;90,0±5,0;100,0±10,0	не менее 20,0
130,0±10,0	70,0±5,0;80,0±5,0;90,0±5,0;100,0±10,0;120,0±10,0	не менее 20,0
150,0±10,0	70,0±5,0;80,0±5,0;90,0±5,0;100,0±10,0;120,0±10,0;140,0±10,0	не менее 20,0
170,0±10,0	70,0±5,0;80,0±5,0;90,0±5,0;100,0±10,0;120,0±10,0;140,0±10,0	не менее 20,0

Таблица 6 (к рисунку 6).

Шапочка «Колпак». Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.06».

Высота изделия (Н), см	Длина внутренней окружности (L ₁), см	Диаметр доньшка (D), см	Длина завязок (L ₂), см
12,0±2,0	38,0±5,0	12,0±2,0	не менее 15,0
	48,0±5,0	16,0±2,0	
	58,0±5,0	18,0±2,0	
16,0±2,0	38,0±5,0	12,0±2,0	не менее 15,0
	48,0±5,0	16,0±2,0	
	58,0±5,0	18,0±2,0	
20,0±2,0	48,0±5,0	16,0±2,0	не менее 15,0
	58,0±5,0	18,0±2,0	
24,0±2,0	48,0±5,0	16,0±2,0	не менее 15,0
	58,0±5,0	18,0±2,0	
28,0±2,0	68,0±5,0	20,0±2,0	не менее 15,0
	68,0±5,0	24,0±2,0	

Таблица 7 (к рисунку 7).

Шапочка «Берет». Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.07».

Высота изделия (А), см	Длина внутренней окружности (О), см	Диаметр доньшка (L), см
12,0±2,0	58,0 ± 5,0	30,0 ± 5,0
	78,0 ± 5,0	40,0 ± 5,0
	98,0 ± 5,0	50,0 ± 5,0
	116,0± 10,0	60,0 ± 5,0
16,0±2,0	58,0 ± 5,0	30,0 ± 5,0
	78,0 ± 5,0	40,0 ± 5,0
	98,0 ± 5,0	50,0 ± 5,0
	116,0± 10,0	60,0 ± 5,0
20,0±2,0	58,0 ± 5,0	30,0 ± 5,0
	78,0 ± 5,0	40,0 ± 5,0
	98,0 ± 5,0	50,0 ± 5,0
	116,0 ± 10,0	60,0 ± 5,0

Таблица 8 (к рисунку 8).

Шапочка «Шлем». Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.08».

Высота стенки (Н), см	Длина внутренней окружности (L ₁), см	Длина завязок (L ₂), см
33,0 ± 3,0	55,0± 5,0; 65,0± 5,0; 75,0± 5,0	не менее 40,0
39,0 ± 3,0	55,0± 5,0; 65,0± 5,0; 75,0± 5,0; 85,0 ± 5,0; 94,0 ± 5,0	не менее 40,0

Таблица 9 (к рисунку 9).

Шпалочка «Шпалочка для новорожденного». Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.09».

Высота изделия (А), см	Длина завязок (F), см
7,0 ± 1,0; 9,0 ± 1,0; 11,0 ± 1,0; 13,0 ± 1,0	не менее 10,0

Таблица 10 (к рисунку 10).

Бахилы медицинские высокие. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.10».

Высота изделия (А), см	Длина ступни (N), см
6,0±0,5	6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
7,0±0,5	6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
8,0±0,5	9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
9,0±0,5	9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
10,0±1,0	9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
12,0±1,0	9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
14,0±1,0	9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
16,0±1,0	9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
18,0±1,0	9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
20,0±2,0	9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
24,0±2,0	9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
28,0±2,0	9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0
32,0±3,0	9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 8,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 38,0±3,0; 44,0±3,0; 47,0±3,0

11 (к рисунку 11).

Бахилы медицинские высокие. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.11».

Высота изделия (А), см	Длина ступни (N), см	Длина завязок (при наличии) (K), см
40,0±5,0	18,0±3,0; 24,0±3,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±3,0; 47,0±3,0; 55,0 ± 5,0	Не менее 20,0
50,0±5,0	18,0±3,0; 24,0±3,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±3,0; 47,0±3,0; 55,0 ± 5,0	Не менее 20,0
60,0±5,0	18,0±3,0; 24,0±3,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±3,0; 47,0±3,0; 55,0 ± 5,0	Не менее 20,0
70,0±5,0	18,0±3,0; 24,0±3,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±3,0; 47,0±3,0; 55,0 ± 5,0	Не менее 20,0
80,0±5,0	18,0±3,0; 24,0±3,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±3,0; 47,0±3,0; 55,0 ± 5,0	Не менее 20,0
90,0±5,0	18,0±3,0; 24,0±3,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±3,0; 47,0±3,0; 55,0 ± 5,0	Не менее 20,0
100,0 ± 10,0	18,0±3,0; 24,0±3,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±3,0; 47,0±3,0; 55,0 ± 5,0	Не менее 20,0

Таблица 12 (к рисунку 12).

Бахилы медицинские высокие. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.12».

Высота изделия (А), см	Длина ступни (N), см
16,0±1,0	12,0±1,0; 13,0±1,0; 14,0±1,0; 15,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0
18,0±1,0	12,0±1,0; 13,0±1,0; 14,0±1,0; 15,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0
20,0±2,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
24,0±2,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
28,0±2,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0

32,0±3,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
40,0 ± 5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
50,0 ± 5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
60,0 ± 5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
70,0 ± 5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
80,0 ± 5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
90,0 ± 5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
100,0 ± 10,0;	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
120,0 ± 10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
140,0 ± 10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0
160,0 ± 10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 32,0±3,0; 40,0 ± 5,0; 50,0 ± 5,0; 60,0 ± 5,0; 70,0 ± 5,0; 80,0 ± 5,0; 90,0 ± 5,0

Таблица 13 (к рисунку 13).

Нарукавники. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.13».

Длина изделия (А), см	Ширина изделия в верхней части (К), см	Ширина изделия в области манжета (К1), см
40,0±5,0	22,0±2,0	15,0±2,0
50,0±5,0	26,0±2,0	15,0±2,0

Таблица 14 (к рисунку 14).

Рубашка для роженицы (для пациента). Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.14».

Наименование показателя	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6	Размер 7
Длина переда от середины горловины до низа (L), см;	70,0 ± 5,0	80,0 ± 5,0	90,0 ± 5,0	100,0 ± 10,0	120,0 ± 10,0	140,0 ± 10,0	160,0 ± 20,0
Высота проймы рукава (H), см;	20,0 ± 2,0	25,0 ± 2,0	34,0 ± 3,0	34,0 ± 3,0	34,0 ± 3,0	34,0 ± 3,0	34,0 ± 3,0
Ширина на уровне глубины проймы (C), см.	40,0 ± 4,0	45,0 ± 4,0	72,0 ± 5,0	72,0 ± 5,0	72,0 ± 5,0	72,0 ± 5,0	72,0 ± 5,0

Таблица 15 (к рисунку 15).

Рубашка для новорожденного. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.15».

Наименование показателя	Размер 1	Размер 2
Длина спинки рубашки (H1), см	28,0 ± 3,0	23,0 ± 3,0
Длина переда рубашки от горловины до низа (H2), см	22,0 ± 2,0	16,0 ± 2,0
Длина рукава рубашки от горловины (L), см	20,0 ± 2,0	10,0 ± 2,0
Ширина переда рубашки на уровне глубины проймы (C1), см	28,0 ± 3,0	25,0 ± 3,0
Ширина спинки рубашки (C2), см	28,0 ± 3,0	25,0 ± 3,0
Ширина рубашки снизу (C3), см	28,0 ± 3,0	25,0 ± 3,0

Таблица 16 (к рисунку 16).

Трусики процедурные. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.16».

Наименование показателя	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Высота (H), см	35,0 ± 3,0	29,0 ± 3,0	36,0 ± 3,0	30,0 ± 3,0
½ длины на бедрах при растянутой резинке (L1), см	52,0 ± 5,0	52,0 ± 5,0	40,0 ± 4,0	40,0 ± 4,0

Длина внутренней окружности (L 2), см	79,0 ± 5,0	79,0 ± 5,0	130,0 ± 10,0	110,0 ± 10,0
Длина талии при растянутой резинке (L3), см	82,0 ± 5,0	82,0 ± 5,0	130,0 ± 10,0	110,0 ± 10,0

Таблица 17 (к рисунку 17).

Накидка медицинская Обозначение «Арт-Синтез 9398.002 17».

Длина от середины груди до низа (Н), см	Ширина на уровне глубины проймы (C1), см	Ширина внизу (C2), см	Длина пояса (А), см
	40,0±5,0	40,0±5,0	Не менее 30,0
	50,0±5,0	50,0±5,0	
	60,0±5,0	60,0±5,0	
	70,0±5,0	70,0±5,0	
	80,0±5,0	80,0±5,0	
	90,0±5,0	90,0±5,0	
	100,0±10,0	100,0±10,0	
	110,0±10,0	110,0±10,0	
±5,0	40,0±5,0	40,0±5,0	Не менее 30,0
	50,0±5,0	50,0±5,0	
	60,0±5,0	60,0±5,0	
	70,0±5,0	70,0±5,0	
	80,0±5,0	80,0±5,0	
	90,0±5,0	90,0±5,0	
	100,0±10,0	100,0±10,0	
	110,0±10,0	110,0±10,0	
±5,0	40,0±5,0	40,0±5,0	Не менее 30,0
	50,0±5,0	50,0±5,0	
	60,0±5,0	60,0±5,0	
	70,0±5,0	70,0±5,0	
	80,0±5,0	80,0±5,0	
	90,0±5,0	90,0±5,0	
	100,0±10,0	100,0±10,0	
	110,0±10,0	110,0±10,0	
±5,0	40,0±5,0	40,0±5,0	Не менее 30,0
	50,0±5,0	50,0±5,0	
	60,0±5,0	60,0±5,0	
	70,0±5,0	70,0±5,0	
	80,0±5,0	80,0±5,0	
	90,0±5,0	90,0±5,0	
	100,0±10,0	100,0±10,0	
	110,0±10,0	110,0±10,0	
±5,0	40,0±5,0	40,0±5,0	Не менее 30,0
	50,0±5,0	50,0±5,0	
	60,0±5,0	60,0±5,0	
	70,0±5,0	70,0±5,0	
	80,0±5,0	80,0±5,0	

	90,0±5,0	90,0±5,0	
	100,0±10,0	100,0±10,0	
	110,0±10,0	110,0±10,0	
±10,0	60,0±5,0	60,0±5,0	Не менее 30,0
	70,0±5,0	70,0±5,0	
	80,0±5,0	80,0±5,0	
	90,0±5,0	90,0±5,0	
	100,0±10,0	100,0±10,0	
	110,0±10,0	110,0±10,0	
	130,0±10,0	130,0±10,0	
	150,0±10,0	150,0±10,0	
	170,0±10,0	170,0±10,0	
±10,0	60,0±5,0	60,0±5,0	Не менее 30,0
	70,0±5,0	70,0±5,0	
	80,0±5,0	80,0±5,0	
	90,0±5,0	90,0±5,0	
	100,0±10,0	100,0±10,0	
	110,0±10,0	110,0±10,0	
	130,0±10,0	130,0±10,0	
	150,0±10,0	150,0±10,0	
	170,0±10,0	170,0±10,0	
±10,0	60,0±5,0	60,0±5,0	Не менее 30,0
	70,0±5,0	70,0±5,0	
	80,0±5,0	80,0±5,0	
	90,0±5,0	90,0±5,0	
	100,0±10,0	100,0±10,0	
	110,0±10,0	110,0±10,0	
	130,0±10,0	130,0±10,0	
	150,0±10,0	150,0±10,0	
	170,0±10,0	170,0±10,0	
±10,0	60,0±5,0	60,0±5,0	Не менее 30,0
	70,0±5,0	70,0±5,0	
	80,0±5,0	80,0±5,0	
	90,0±5,0	90,0±5,0	
	100,0±10,0	100,0±10,0	
	110,0±10,0	110,0±10,0	
	130,0±10,0	130,0±10,0	
	150,0±10,0	150,0±10,0	
	170,0±10,0	170,0±10,0	
±10,0	60,0±5,0	60,0±5,0	Не менее 30,0
	70,0±5,0	70,0±5,0	
	80,0±5,0	80,0±5,0	
	90,0±5,0	90,0±5,0	
	100,0±10,0	100,0±10,0	
	110,0±10,0	110,0±10,0	
	130,0±10,0	130,0±10,0	
	150,0±10,0	150,0±10,0	
	170,0±10,0	170,0±10,0	

Таблица 18 (к рисунку 18)

Простыня медицинская влагонепроницаемая. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.18».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см
70,0±5,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0
80,0±5,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0;
90,0±5,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0;

100,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0;
110,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0;
130,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0;
150,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0;
170,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0;
190,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0;
210,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0;
230,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0;
250,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0;
270,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0;
290,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0;
310,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0; 310,0±10,0;
330,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0; 310,0±10,0; 330,0±10,0;
350,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0; 310,0±10,0; 330,0±10,0; 350,0±10,0;
370,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0; 310,0±10,0; 330,0±10,0; 350,0±10,0;
390,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0; 310,0±10,0; 330,0±10,0; 350,0±10,0;

Таблица 19 (к рисунку 19)

Пододеляльник. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.19»

Длина пододеляльника (А), см	Ширина пододеляльника (В), см	Ширина входа в пододеляльник (D), см
90±5,0	50,0±5,0	20,0±2,0
	60,0±5,0	20,0±2,0
	70,0±5,0	30,0±5,0
	80,0±5,0	35,0±5,0
	90,0±5,0	35,0±5,0
100,0±10,0	50,0±5,0	20,0±2,0
	60,0±5,0	20,0±2,0
	70,0±5,0	30,0±5,0
	80,0±5,0	35,0±5,0
	90,0±5,0	35,0±5,0
120,0±10,0	50,0±5,0	20,0±2,0
	60,0±5,0	20,0±2,0
	70,0±5,0	30,0±5,0
	80,0±5,0	35,0±5,0
	90,0±5,0	35,0±5,0
140,0±10,0	80,0±5,0	35,0±5,0
	90,0±5,0	35,0±5,0
	100,0±10,0	35,0±5,0
	120,0±10,0	35,0±5,0
	140,0±10,0	35,0±5,0
	160,0±10,0	50,0±5,0

	180,0±10,0	50,0±5,0
160,0±10,0	80,0±5,0	35,0±5,0
	90,0±5,0	35,0±5,0
	100,0±10,0	35,0±5,0
	120,0±10,0	35,0±5,0
	140,0±10,0	35,0±5,0
	160,0±10,0	50,0±5,0
	180,0±10,0	50,0±5,0
180,0±10,0	80,0±5,0	35,0±5,0
	90,0±5,0	35,0±5,0
	100,0±10,0	35,0±5,0
	120,0±10,0	35,0±5,0
	140,0±10,0	35,0±5,0
	160,0±10,0	50,0±5,0
	180,0±10,0	50,0±5,0
200,0±10,0	80,0±5,0	35,0±5,0
	90,0±5,0	35,0±5,0
	100,0±10,0	35,0±5,0
	120,0±10,0	35,0±5,0
	140,0±10,0	35,0±5,0
	160,0±10,0	50,0±5,0
	180,0±10,0	50,0±5,0
220,0±10,0	80,0±5,0	35,0±5,0
	90,0±5,0	35,0±5,0
	100,0±10,0	35,0±5,0
	120,0±10,0	35,0±5,0
	140,0±10,0	35,0±5,0
	160,0±10,0	50,0±5,0
	180,0±10,0	50,0±5,0
240,0±10,0	100,0±10,0	35,0±5,0
	120,0±10,0	35,0±5,0
	140,0±10,0	35,0±5,0
	160,0±10,0	50,0±5,0
	180,0±10,0	50,0±5,0
250,0±10,0	100,0±10,0	35,0±5,0
	120,0±10,0	35,0±5,0
	140,0±10,0	35,0±5,0
	160,0±10,0	50,0±5,0
	180,0±10,0	60,0±5,0

Таблица 20 (к рисунку 20)

Наволочка. Обозначение «Арг-Синтез 9398.002.20».

Длина наволочки (А), см	Ширина наволочки (В), см
10,0±1,0	10,0±1,0
12,0±1,0	10,0±1,0; 12,0±1,0
14,0±2,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0
18,0±2,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0; 18,0±2,0
22,0±2,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0; 18,0±2,0; 22,0±2,0

26,0±2,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0; 18,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0
30,0±3,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0; 18,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0
36,0±3,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0; 18,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0
42,0±4,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0; 18,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0
50,0±5,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0; 18,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0
60,0±5,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0; 18,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0
70,0±5,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0; 18,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0
80,0±5,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0; 18,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0
90,0±5,0	10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±2,0; 18,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0

Таблица 21 (к рисунку 21)

Наименование: «Матрасники» (серия 00/08-002.2)

Длина матрасника (А), см	Ширина матрасника (В), см	Ширина стенки матрасника (С), см
90,0±5,0	50,0±5,0	10,0±1,0
	60,0±5,0	10,0±1,0
	70,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0
	80,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
	90,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
100,0±10,0	50,0±5,0	10,0±1,0
	60,0±5,0	10,0±1,0
	70,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0
	80,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
	90,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
110,0±10,0	100,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
	50,0±5,0	10,0±1,0
	60,0±5,0	10,0±1,0
	70,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0
	80,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
130,0±10,0	90,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
	100,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
	110,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
	130,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
	150,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0; 40,0±5,0
150,0±10,0	80,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
	90,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
	100,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
	110,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
	130,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
170,0±10,0	150,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0; 40,0±5,0
	170,0±10,0	30,0±5,0; 40,0±5,0; 50,0±5,0
	80,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
	90,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
	100,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
190,0±10,0	110,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
	130,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
	150,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0; 40,0±5,0
	170,0±10,0	30,0±5,0; 40,0±5,0; 50,0±5,0
	190,0±10,0	30,0±5,0; 40,0±5,0; 50,0±5,0

210,0±10,0	150,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0; 40,0±5,0
	170,0±10,0	30,0±5,0; 40,0±5,0; 50,0±5,0
	80,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
	90,0±5,0	10,0±1,0; 20,0±2,0; 30,0±5,0
	100,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
	110,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
	130,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0
	150,0±10,0	20,0±2,0; 30,0±5,0; 40,0±5,0
	170,0±10,0	30,0±5,0; 40,0±5,0; 50,0±5,0

Таблица 22 (к рисунку 22)

Простыня медицинская. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.22».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см
70,0±5,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0
80,0±5,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0;
90,0±5,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0;
100,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0;
110,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0
130,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0;
150,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0
170,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0;
190,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0
210,0±10,0	30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0;
230,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0
250,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0;
270,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0
290,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0
310,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0; 310,0±10,0
330,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0; 310,0±10,0; 330,0±10,0;
350,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0; 310,0±10,0; 330,0±10,0; 350,0±10,0
370,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0; 310,0±10,0; 330,0±10,0; 350,0±10,0
390,0±10,0	60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0; 230,0±10,0; 250,0±10,0; 270,0±10,0; 290,0±10,0; 310,0±10,0; 330,0±10,0; 350,0±10,0

Таблица 23 (к рисунку 23)

Чехол на инструментальный столик. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.23».

Длина чехла (A), см	Ширина чехла (B), см	Длина завязок (F), см (при наличии)
50,0±5,0	50,0±5,0	не менее 20,0
60,0±5,0	50,0±5,0; 60,0±5,0	не менее 20,0
70,0±5,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0	не менее 20,0
80,0±5,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0	не менее 20,0
90,0±5,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0	не менее 20,0

100,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0	не менее 20,0
120,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0	не менее 30,0
140,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0	не менее 30,0
160,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0; 160,0±10,0	не менее 30,0
180,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0; 160,0±10,0; 180,0±10,0	не менее 30,0

таблица 24 (к рисунку 23)

Чехол на медоборудование. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.24».

Длина чехла (А), см	Ширина чехла (или диаметр) (В), см	Длина завязок (F), см
5,0±0,5	5,0±0,5	не менее 5,0
6,0±0,5	5,0±0,5; 6,0±0,5	не менее 5,0
7,0±0,5	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5	не менее 5,0
8,0±0,5	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5	не менее 5,0
9,0±0,5	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5	не менее 5,0
10,0±1,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0	не менее 5,0
12,0±1,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0	не менее 10,0
14,0±1,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0	не менее 10,0
16,0±1,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0	не менее 10,0
18,0±1,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0	не менее 10,0
20,0±2,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0	не менее 10,0
24,0±2,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0	не менее 10,0
28,0±2,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0	не менее 10,0
30,0±3,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30,0±3,0	не менее 10,0
36,0±3,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0	не менее 10,0
42,0±4,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0	не менее 10,0
50,0±5,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0	не менее 10,0
60,0±5,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0	не менее 10,0
70,0±5,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0	не менее 10,0
80,0±5,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0	не менее 10,0
90,0±5,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0	не менее 10,0

[illegible]

380,0±10,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0 28,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0; 160,0±10,0; 180,0±10,0; 200,0±10,0; 220,0±10,0; 240,0±10,0; 260,0±10,0; 280,0±10,0; 300,0±10,0; 320,0±10,0; 340,0±10,0; 360,0±10,0; 380,0±10,0	не менее 20,0
------------	---	---------------

Таблица 25 (к рисунку 24)

Мешок медицинский защитный. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.25»

Длина мешка (А), см	Ширина мешка (В), см
22,0±2,0	22,0±2,0; 26,0±2,0
26,0±2,0	22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0
30,0±3,0	22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0
36,0±3,0	22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0
42,0±4,0	22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0
50,0±5,0	22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0
60,0±5,0	22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0
70,0±5,0	22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0
80,0±5,0	22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0;
90,0±5,0	22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0
100,0±10,0	22,0±2,0; 26,0±2,0; 30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0; 50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0
120,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0
140,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0; 160,0±10,0
160,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0; 160,0±10,0; 180,0±10,0
180,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0; 160,0±10,0; 180,0±10,0; 200,0±10,0
200,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0; 160,0±10,0; 180,0±10,0; 200,0±10,0; 220,0±10,0
220,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0; 160,0±10,0; 180,0±10,0; 200,0±10,0; 220,0±10,0; 240,0±10,0
240,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0; 160,0±10,0; 180,0±10,0; 200,0±10,0; 220,0±10,0; 240,0±10,0; 260,0±10,0
260,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0; 160,0±10,0; 180,0±10,0; 200,0±10,0; 220,0±10,0; 240,0±10,0; 260,0±10,0; 280,0±10,0
280,0±10,0	50,0±5,0; 60,0±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 120,0±10,0; 140,0±10,0; 160,0±10,0; 180,0±10,0; 200,0±10,0; 220,0±10,0; 240,0±10,0; 260,0±10,0; 280,0±10,0

Таблица 26 (к рисунку 25)

Конверт для новорожденного Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.26»

Длина изделия (L), см	Ширина изделия (В), см	Высота изделия (H), см
40,0 ± 4,0	27,0±3,0	2,0 ± 0,5; 3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5;
	33,0±3,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
	40,0±4,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
48,0 ± 4,0	27,0±3,0	2,0 ± 0,5; 3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5;
	33,0±3,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
	40,0±4,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
	48,0±4,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
56,0±5,0	27,0±3,0	2,0 ± 0,5; 3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5;
	33,0±3,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
	40,0±4,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
	48,0±4,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
66,0±5,0	27,0±3,0	2,0 ± 0,5; 3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5;
	33,0±3,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5

6,0±5,0	40,0±4,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
	48,0±4,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
	27,0±3,0	2,0 ± 0,5; 3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5;
	33,0±3,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
	40,0±4,0	3,0 ± 0,5; 4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5
	48,0±4,0	4,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,5

Таблица 27 (к рисунку 26).

Салфетка впитывающая. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002 27».

Длина салфетки (L), см	Ширина салфетки (B), см
3,3±0,3	3,3±0,3
3,9±0,3	3,3±0,3; 3,9±0,3;
4,6±0,4	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4;
5,0±0,5	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5;
6,0±0,5	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5;
7,0±0,5	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5;
8,0±0,5	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5;
9,0±0,5	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5;
10,0±1,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0;
12,0±1,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0;
14,0±1,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0;
16,0±1,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0;
18,0±1,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0;
20,0±2,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0;
24,0±2,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0;
28,0±2,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0;
33,0±3,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0;
39,0±3,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0;
46,0±4,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0; 46,0±4,0;
55,0±5,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0; 46,0±4,0; 55,0±5,0;
65,0±5,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0; 46,0±4,0; 55,0±5,0; 65,0±5,0;
75,0±5,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0; 46,0±4,0; 55,0±5,0; 65,0±5,0; 75,0±5,0;
85,0±5,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0; 46,0±4,0; 55,0±5,0; 65,0±5,0; 75,0±5,0; 85,0±5,0;

Таблица 28 (к рисунку 26).

Салфетка впитывающая. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002 28».

Длина салфетки (L), см	Ширина салфетки (B), см
3,3±0,3	3,3±0,3
3,9±0,3	3,3±0,3; 3,9±0,3;
4,6±0,4	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4;
5,0±0,5	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5;
6,0±0,5	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5;
7,0±0,5	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5;
8,0±0,5	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5;
9,0±0,5	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5;
10,0±1,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0;

12,0±1,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0;
14,0±1,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0;
16,0±1,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0;
18,0±1,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0;
20,0±2,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0;
24,0±2,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0;
28,0±2,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0;
33,0±3,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0;
39,0±3,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0;
46,0±4,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0; 46,0±4,0;
55,0±5,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0; 46,0±4,0; 55,0±5,0;
65,0±5,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0; 46,0±4,0; 55,0±5,0; 65,0±5,0;
75,0±5,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0; 46,0±4,0; 55,0±5,0; 65,0±5,0; 75,0±5,0;
85,0±5,0	3,3±0,3; 3,9±0,3; 4,6±0,4; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0; 12,0±1,0; 14,0±1,0; 16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 33,0±3,0; 39,0±3,0; 46,0±4,0; 55,0±5,0; 65,0±5,0; 75,0±5,0; 85,0±5,0;

Таблица 29 (к рисунку 26).

Пленка впитывающая. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.29».

Наименование показателя	Размеры		
Длина покрывала (L), см	320,0 ± 10,0	180 ± 10,0	210,0 ± 10,0
Ширина покрывала (B), см	200,0 ± 10,0	100,0 ± 10,0	140,0 ± 10,0

Таблица 30 (к рисунку 26).

Пленка впитывающая. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.30».

Длина пеленки (L), см	Ширина пеленки (B), см
40,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0
50,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0
60,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0
70,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0
80,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0;
90,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0;
100,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0;
110,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0;
130,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0;
150,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0;
170,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0;
190,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0;
210,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0;

Таблица 31 (к рисунку 26). Пеленка медицинская. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.31»

Длина пеленки (L), см	Ширина пеленки (B), см
40,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0
50,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0
60,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0
70,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0
80,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0;
90,0±5,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0;
100,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0;
110,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0
130,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0;
150,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0
170,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0;
190,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0
210,0±10,0	16,0±1,0; 18,0±1,0; 20,0±2,0; 24,0±2,0; 28,0±2,0; 30±5,0; 40±5,0; 50±5,0; 60±5,0; 70,0±5,0; 80,0±5,0; 90,0±5,0; 100,0±10,0; 110,0±10,0; 130,0±10,0; 150,0±10,0; 170,0±10,0; 190,0±10,0; 210,0±10,0;

Таблица 32 (к рисунку 27).

Карман-присмник. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.32»

Длина кармана (A), см	Ширина кармана внизу (B), см	Ширина кармана сверху (C), см
20,0±5,0	20,0±5,0	10,0±5,0
30,0±5,0	30,0±5,0	20,0±5,0
40,0±5,0	40,0±5,0	30,0±5,0
50,0±10,0	50,0±5,0	40,0±5,0
70,0±10,0	60,0±5,0	50,0±5,0
90,0±10,0	70,0±5,0	60,0±5,0
110,0±10,0	80,0±5,0	70,0±5,0

Таблица 33 (к рисунку 28)

Тапочки медицинские. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.33».

Наименование показателя	Размер			
Высота подошвы (H), см.	1,0 ± 0,5; 2,0 ± 0,5;	1,0 ± 0,5; 2,0 ± 0,5;	1,0 ± 0,5; 2,0 ± 0,5;	1,0 ± 0,5; 2,0 ± 0,5;
	3,0 ± 0,5	3,0 ± 0,5	3,0 ± 0,5	3,0 ± 0,5
Диаметр, при растянутой резинке (D), см.	18,0 ± 2,0;	22,0 ± 2,0;	26,0 ± 2,0	26,0 ± 2,0
Длина подошвы (A), см.	28,0 ± 3,0	34,0 ± 3,0	41,0 ± 4,0	45,0 ± 4,0

Таблица 34 (к рисунку 30)

Валик для процедур. Обозначение «Арт-Синтез 9398.002.34».

Длина изделия (L), см	Ширина изделия (B), см	Высота изделия (H), см
10,0±1,0	7,0±0,5	4,0±0,5; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5
	8,0±0,5	4,0±0,5; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5
	9,0±0,5	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0
	10,0±1,0	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0
12,0±1,0	7,0±0,5	4,0±0,5; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5
	8,0±0,5	4,0±0,5; 5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5
	9,0±0,5	5,0±0,5; 6,0±0,5; 7,0±0,5; 8,0±0,5; 9,0±0,5; 10,0±1,0

[illegible]

16,0±1,0;	5,0±0,5;6,0±0,5;7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0; 12,0±1,0;14,0±2,0;22,0±2,0;
18,0±1,0;	5,0±0,5;6,0±0,5;7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0; ;12,0±1,0;14,0±2,0;22,0±2,0;
20,0±2,0;	5,0±0,5;6,0±0,5;7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0; 12,0±1,0;14,0±2,0;22,0±2,0
24,0±2,0;	5,0±0,5;6,0±0,5;7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0; 12,0±1,0;14,0±2,0;22,0±2,0; 26,0±2,0;30,0±3,0
30,0±5,0;	5,0±0,5;6,0±0,5;7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0; 12,0±1,0;14,0±2,0;22,0±2,0; 26,0±2,0;30,0±3,0
40,0±5,0	5,0±0,5;6,0±0,5;7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0; 12,0±1,0;14,0±2,0;22,0±2,0; 26,0±2,0;30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0
50,0±5,0	5,0±0,5;6,0±0,5;7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0; 12,0±1,0;14,0±2,0;22,0±2,0; 26,0±2,0;30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0;50,0±5,0
60,0±5,0	7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0;12,0±1,0;14,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0;30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0;50,0±5,0;60,0±5,0
70,0±5,0;	7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0;12,0±1,0;14,0±2,0 22,0±2,0; 26,0±2,0;30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0;50,0±5,0;60,0±5,0
80,0±5,0	7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0;12,0±1,0;14,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0;30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0;50,0±5,0;60,0±5,0
90,0±5,0	7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0;12,0±1,0;14,0±2,0; 22,0±2,0; 26,0±2,0;30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0;50,0±5,0;60,0±5,0
100,0±10,0	7,0±0,5;8,0±0,5;9,0±0,5;10,0±1,0;10,0±1,0;12,0±1,0;14,0±2,0 ;22,0±2,0; 26,0±2,0;30,0±3,0; 36,0±3,0; 42,0±4,0;50,0±5,0;60,0±5,0

Таблица 35 (к рисунку 30)

Простыня из нетканого материала (табл. 35)

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см
70,0±5,0	70,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
110,0±10,0	110,0±10,0
130,0±10,0	130,0±10,0
150,0±10,0	150,0±10,0
170,0±10,0	170,0±10,0
190,0±10,0	190,0±10,0
210,0±10,0	210,0±10,0
230,0±10,0	230,0±10,0
250,0±10,0	250,0±10,0
270,0±10,0	270,0±10,0

Таблица 36 (к рисунку 31) Маска медицинская

Длина маски (L), см	17,5±1,5; 19,5±1,5
Ширина маски (C), см	7,5±0,5; 9,5±0,5
Длина завязок (при наличии) (L 1), см	42,0±4,0
Длина резинок в растянутом состоянии (при наличии) (L 2), см	не менее 30,0

17.5. Комплекты и отдельные изделия должны изготавливаться из материалов, представленных в таблице 37.

Таблица 37

Наименование материалов.	Нормативный документ и/или предприятие - изготовитель	Наименование изделий комплектов
1	2	3
1. СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мельт-спан»), плотность 20±5 г/м ²	ЗАО «Регент Петканые Материалы». Россия; ТУ 2282-001-72716572-2013	Халат медицинский без усиленной защитной зоны; Шапочка («Колпак», «Шапочка для новорожденного»); Рубашка для роженицы (для пациента); Рубашка для новорожденного; Накладка медицинская; Простыня медицинская; Пододеяльник; Наволочка; Бахилы медицинские (высокие, низкие); Чехол на медоборудование; Куртка медицинская; Трусики процедурные; Салфетка медицинская; Покрывало на оборудование;

		Пеленка медицинская; Брюки медицинские.
СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мелт- дн»), плотность 50±10 г/м ²	ЗАО «Регент Нетканые Материалы», Россия; ТУ 2282-001-72716572-2013	Халат медицинский без усиленной защитной зоны; Куртка медицинская; Брюки медицинские; Комбинезон; Фартук медицинский защитный; Шапочка («Колпак», «Берет», «Шлем»); Бахилы медицинские (высокие, низкие);
		Чехол на конечности пациента; Нарукавники; Рубашка для роженицы (для пациента); Трусики процедурные; Накидка медицинская; Пододеяльник; Наволочка; Простыня медицинская; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Салфетка медицинская; Покрывало на оборудование; Пеленка медицинская; Карман-приемник; Конверт для новорожденного (внешний слой); Валик для процедур (внешний слой)
1. СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мелт- лан»), плотность 80±10 г/м ²	ЗАО «Регент Нетканые Материалы», Россия; ТУ 2282-001-72716572-2013	Мешок медицинский защитный; Тапочки медицинские; Наматрачник;
4. Спанлейс (материал нетканый) плотность 40±5 г/м ²	ООО «Авангард», Россия; ТУ 8390-003-56176857-2007	Куртка медицинская; Брюки медицинские; Шапочка («Колпак», «Берет», «Шапочка для новорожденного»); Рубашка для роженицы (для пациента); Рубашка для новорожденного; Салфетка впитывающая; Пеленка впитывающая; Пододеяльник; Наволочка; Простыня медицинская;
5. Спанлейс (материал нетканый) плотность 50±10 г/м ²	ООО «Авангард», Россия; ТУ 8390-003-56176857-2007	Конверт для новорожденного (внутренний слой); Валик для процедур (внутренний слой)
6. Вуденпалп (материал нетканый). плотность 65±10 г/м ²	Фирма «Shangyu Wanrui Non- Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Халат медицинский без усиленной защитной зоны; Комбинезон; Куртка медицинская; Нарукавники; Чехол на конечности пациента; Брюки медицинские
7. Ламинированный Спанбонд (материал нетканый). плотность 50±10г/м ²	ООО «КЗНМ», Россия; ТУ 8390-002-71242729-2005	Бахилы медицинские (высокие, низкие); Чехол на конечности пациента; Нарукавники; Комбинезон; Наматрачник; Халат медицинский с усиленной защитной зоной; Чехол на медоборудование;
8. Ламинированный Спанбонд (материал нетканый). плотность 50±10г/м ²	Фирма «Shangyu Wanrui Non- Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Фартук медицинский защитный; Простыня медицинская влагонепроницаемая; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Мешок медицинский защитный; Покрывало на оборудование; Карман-приемник; Простыня на инструментальный столик
9. Ламинированный спанлейс (материал нетканый). плотность 65±10г/м ²	Фирма «Shangyu Wanrui Non- Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Халат медицинский с усиленной защитной зоной; Комбинезон; Фартук медицинский защитный; Бахилы медицинские (высокие, низкие); Салфетка медицинская; Карман-приемник;

		Пеленка медицинская; Простыня медицинская влагонепроницаемая; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование
«Сантейс» (материал тканый) плотность 65 ±10г/м ²	Фирма «Shangyu Wanrui Non-Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Халат медицинский с усиленной защитной зоной; Комбинезон; Фартук медицинский защитный; Бахилы медицинские (высокие, низкие); Салфетка медицинская; Карман-приемник; Пеленка медицинская; Простыня медицинская влагонепроницаемая; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование
1. Полотно трикотажное из хлопчатобумажной пряжи (100%).	Изготовитель: «UNVER TEXTIL KONFEKSIYON IMALAT SANAT VE TICARET LIMITED» Турция	Фиксирующий элемент (манжет); Халат медицинский без усиленной защитной зоны; Комбинезон; Куртка медицинская; Нарукавники; Чехол на конечности пациента; Брюки медицинские.
1. Фиксирующая резинка (состав: латекс (нить), 100% хлопок (оплетка))	ООО «ФИ-ТЕКС» по ТУ 8151-001-59722763-2004	Фиксирующий элемент (резинка): Бахилы медицинские (высокие, низкие); Чехол на конечности пациента; Брюки медицинские; Комбинезон; Куртка медицинская; Намагнитник; Нарукавники; Грусики процедурные; Халат медицинский без усиленной защитной зоны; Халат медицинский с усиленной защитной зоной; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Шапочка «Берет».
12. Синтепон (полотно нетканое термоскрепленное, из полиэфирных волокон (100%))	ООО «Сибирский синтепон» ТУ 8391-001-14765083-2003	Внутренний слой: 1.Конверт для новорожденного 2.Валик для процедур

17.6. Покупные изделия, должны соответствовать указанным в таблице 38.

Таблица 38

Наименование покупных изделий.	Нормативный документ и предприятие - изготовитель	Наименование изделий комплектов
1	2	3
1. Маска медицинская из нетканого материала одноразовая	ООО «МАСКА», Россия; ТУ 9398-001-64260744-2010 ТУ №ФСР 2010/08512 (состав: спанбонд (100% полипропилен); мелтблаун (100% полипропилен); спанбонд (100% полипропилен); фиксирующая резинка (состав: латекс (нить), 100% хлопок (оплетка)); фиксатор (непластифицированный ПВХ)	Маска медицинская

17.7. Материалы для изделий, должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 39. Таблица 39.

17.7. Материалы для изделий, должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 39. Таблица 39.						
Наименование материала.	Поверхностная плотность, г/м ² не менее	Разрывная нагрузка, кгс. не менее				Водоупорность, мм в д. ст. не менее
		в сухом состоянии		во влажном состоянии		
		в продольном направлении	в поперечном направлении	в продольном направлении	в поперечном направлении	
1	2	3	4	5	6	7
1. Неламинированный нетканый материал (СМС (спан-мельт-спан),	15,0	2,0	1,5	1,8	1,2	-
	20,0	3,0	2,0	2,5	1,8	-

Спанлейс, Вуденпалл,)	25,0	3,5	2,0	3,0	1,8	-
	35,0	4,0	2,5	3,5	2,0	-
	40,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	45,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	50,0	5,0	3,5	4,5	3,0	-
	55,0	5,0	3,5	4,5	3,0	-
	60,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
	70,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
	80,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
2. Ламинированный нетканый материал (Спанбонд, Спанлейс, Сантейс)	40,0	5,0	3,5	4,5	3,0	500
	50,0	5,5	4,0	5,0	3,5	500
	55,0	5,5	4,0	5,0	3,5	1000
	60,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	65,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	70,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	75,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000

17.8.Поглотительная способность впитывающих изделий (пеленки впитывающей; салфетки впитывающей) должна быть не менее 5 г/г.

17.9.Масса изделий в комплектах и отдельных упаковках должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 40 -41.

Таблица 40.

Масса изделий в комплектах	
Наименование изделия	Масса, г
2	3
Комплект белья медицинского из нетканых материалов, одноразовый нестерильный «Арт-Синтез»	от 200,0 до 2000,0
Комплект одежды медицинской из нетканых материалов, одноразовый нестерильный «Арт-Синтез»	от 200,0 до 2000,0

Таблица 41.

Масса изделий	
Наименование изделия	Масса, г
2	3
Бахилы медицинские высокие	от 8,0 до 70,0
Бахилы медицинские низкие	от 4,0 до 27,0
Брюки медицинские	от 25,0 до 170,0
Валик для процедур	от 30,0 до 300,0
Карман-приемник	от 10,0 до 120,0
Комбинезон	от 160,0 до 300,0
Конверт для новорожденного	от 50,0 до 400,0
Куртка медицинская	от 20,0 до 150,0
Мешок медицинский защитный	от 10,0 до 900,0
Наволочка	от 5,0 до 125,0
Накидка медицинская	от 15,0 до 190,0
Наматрачник	от 10,0 до 300,0
Нарукавники	от 20,0 до 50,0
Пеленка впитывающая	от 3,0 до 185,0
Пеленка медицинская	от 2,0 до 185,0
Пододояльник	от 30,0 до 640,0
Покрывало на оборудование	от 80,0 до 500,0
Простыня медицинская влагонепропицаемая	от 6,5 до 1080,0
Простыня медицинская	от 5,0 до 1000,0
Простыня на инструментальный столик	от 20,0 до 550,0
Рубашка для новорожденного	от 5,0 до 20,0
Рубашка для роженицы (для пациента)	от 40,0 до 250,0
Салфетка впитывающая	от 1,0 до 60,0
Салфетка медицинская	от 1,0 до 60,0
Тапочки медицинские	от 5,0 до 90,0
Трусики процедурные	от 6,0 до 30,0
Фартук медицинский защитный	от 10,1 до 350,0
Халат медицинский без усиленной защитной зоны	от 70,0 до 300,0
Халат медицинский с усиленной защитной зоной	от 80,0 до 350,0

Чехол на инструментальный столик	от 45,0 до 280,0
Чехол на конечности пациента	от 20,0 до 320,0
Чехол на медоборудование	от 2,0 до 1200,0
Шапочка «Берет»	от 8,0 до 50,0
Шапочка «Колпак»	от 8,0 до 50,0
Шапочка- «Шлем»	от 20,0 до 50,0
Шапочка для новорожденного	от 7,0 до 22,0

7.10. Одежда и белье включает ассортимент следующих изделий: Халат медицинский (с усиленной защитной зоной или без нее); Куртка медицинская; Брюки медицинские; Комбинезон; Фартук медицинский защитный; Шапочка («Колпак», «Берет», «Шлем», «Шапочка для новорожденного»), Бахилы медицинские (высокие, низкие); Чехол на конечности пациента; Наручники; Рубашка для роженицы (для пациента); Рубашка для новорожденного; Трусики процедурные; Накидка медицинская; Маска медицинская; Простыня медицинская влагонепроницаемая; Пододеяльник; Наволочка; Наматрачник; Простыня медицинская; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Мешок медицинский защитный; Конверт для новорожденного; Салфетка впитывающая; Салфетка медицинская; Покрывало на оборудование; Пеленка впитывающая, Пеленка медицинская; Карман-приемник; Тапочки медицинские; Валик для процедур; Простыня на инструментальный столик.

Халат медицинский (с усиленной защитной зоной или без нее) должен быть свободного покроя. Тип рукава: втачной или реглан, длинный с вязанным трикотажным манжетом, на завязках или собранным на резинку. Тип горловины: круглый или V-образный вырез без воротника или с воротником-стойкой. Перед халата может быть на кокетке, включать складки, обеспечивающие свободу движения. Халат дополнительно может быть усилен ламинированным материалом как с внутренней стороны изделия, так и с лицевой. Горловина халата фиксируется на завязки. Халат должен фиксироваться сзади на 2-е или 4-е завязки или на поясе в области талии или спереди – на завязки. Низ халата не обработан.

Куртка медицинская должна быть с коротким или длинным рукавом, собранным на резинку или с вязанным трикотажным манжетом. Полочка может быть с накладными карманами или без них. Спинка с кокеткой или без нее. Тип горловины: круглый или прямоугольный или V-образный, с планкой или без. Низ куртки не обработан.

Брюки медицинские должны быть свободного покроя. Верх брюк собран на резинку или завязки (кулиску), возможно наличие карманов спереди или сзади. Низ брюк собран на резинку или не обработан.

Комбинезон должен быть с длинным втачным рукавом, который оканчивается манжетой трикотажной или резинкой. Перед цельнокроеный, спинка должна быть цельнокроеная. Вырез горловины должен быть округлый. Комбинезон может иметь притачанный капюшон с резинкой или кулисой по краю. При разрезной передней полочке застежка на завязки. Комбинезон может на уровне талии фиксироваться резинкой или завязками.

Фартук медицинский защитный должен быть фигурным, цельнокроеным, с двумя завязками на уровне талии, лямкой или завязками, фиксирующей его на шее. Края не обработаны.

Шапочка «Колпак» должна быть цилиндрической формы, с подворотом или без, состоять из стенки и доньшка круглой или овальной формы, с обработанными краями или без. Шапочка фиксируется на затылке при помощи завязок, регулирующих размер колпака.

Шапочка «Берет» должна быть собрана на резинку по краю вдоль окружности. Края могут быть не обработаны.

Шапочка «Шлем» должна состоять из стенки с доньшком, завязок для плотной фиксации на шее или с плечевым покрытием на завязке. Края могут быть не обработаны.

Шапочка «Шапочка для новорожденного» должна состоять из 2-х сшитых между собой частей овальной формы и фиксироваться спереди на завязки. Края могут быть не обработаны.

Бахилы медицинские высокие могут быть с одинарной или двойной ламинированной подошвой или без нее, собраны по верхнему краю на резинку или на завязки (кулиску). Могут фиксироваться на 4-е завязки или без.

Бахилы медицинские низкие должны быть собраны по верхнему краю или по центру на резинку. Края не обработаны.

Чехол на конечности пациента должен быть одноплечным, собранным по верхнему краю на манжету или резинку. Края не обработаны.

Наручники должны быть одношовными, верх и низ собран на резинку или на завязки или низ с вязанными трикотажными манжетами. Края не обработаны.

Рубашка для роженицы (для пациента) должна быть свободного покроя, прямого или расширенного к низу силуэта, с коротким цельнокроеным рукавом или без него. Передняя часть может быть на кокетке. Вырез горловины V-образный или круглый. Тип застежки: с разрезом на завязки. Края могут быть не обработаны.

Рубашка для новорожденного должна быть свободного покроя, с длинным цельнокроеным рукавом. Вырез горловины V-образный или круглый. Тип застежки: спереди или сзади рубашка может фиксироваться на завязки. Края могут быть не обработаны.

Трусики процедурные на уровне талии собраны на резинку или фиксируются при помощи завязок. Низ трусов собран на резинку или не обработан.

Накидка медицинская должна быть без воротника, с увеличенной проймой для свободного движения, без рукавов. Полочка должна быть цельнокроеной со спинкой или состоять из 2-х половинок. Может фиксироваться завязками. Низ накидки не обработан.

Пододеяльник и наволочка представляют собой сшивные изделия прямоугольной или квадратной формы. Края могут быть обработаны и не обработаны.

Наматрачник должен быть прямоугольной формы с бортиком или без, фиксироваться при помощи резинки или на завязки.

Простыня медицинская, простыня медицинская влагонепроницаемая и простыня на инструментальный столик должна быть прямоугольной формы, цельнокроеная, края не обработаны.

Чехол на инструментальный столик должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках или стягиваться на резинке.

Чехол на медоборудование должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках или стягиваться на резинке.

Мешок медицинский защитный должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках.

Конверт для новорожденного должен быть прямоугольной формы. Состоит из двух частей, сшитых по краям и низу, верхний край открыт. Внутренний слой из синтепона.

Салфетка впитывающая, Пеленка впитывающая, представляют собой прямоугольные цельнокросные однослойные изделия с необработанными, не осыпающимися краями.
Салфетка медицинская, Покрывало на оборудование, Пеленка медицинская должны быть прямоугольной формы, цельнокроеное, края не обработаны.
Тапочки медицинские должны быть с открытым или закрытым носком, состоять из подошвы и верхней части. Края могут быть не обработаны.
Валик для процедур представляет собой сшивное изделие прямоугольной или овальной формы. Внутренний слой из синтепона. Края могут быть обработаны и не обработаны
Карман-приемник может быть квадратной, прямоугольной или трапециевидной формы, 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный. Края не обработаны.
Маска медицинская, 3-х слойная, может быть на завязках или резинках, с обработанными краями или без. Маска оснащена фиксатором.

18 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Одежда и белье могут применяться в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах (кроме инфекционных, кожно-венерологических, микологических, реанимационных отделений, операционных блоков), в социальных учреждениях.

19 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту

20 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

21 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В условиях эксплуатации изделия должны быть нетоксичными и не вызывать местно-раздражающих и аллергических эффектов при контакте с неповрежденной кожей.

Производство изделий не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, сенсибилизирующего воздействия на человека.

Все работы по их производству должны проводиться в помещениях, оборудованных местной приточно-вытяжной вентиляцией. Применение открытого огня в этих помещениях запрещается.

Условия труда работающих – должны соответствовать действующим правилам и нормам. Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями технологического процесса. Все работающие должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры по действующим приказам МЗ РФ.

Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием.

При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань.

При производстве изделий, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке.

Охрана окружающей среды – по ГОСТ 17.2.3.01.

Запрещается неорганизованное сжигание бывших в употреблении изделий.

22 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

На территории Российской Федерации по вопросам, касающимся качества изделий: Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные «АРТ-СИНТЕЗ» в комплектах и отдельных упаковках

обращаться по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Синтез»

Юридический и фактический адрес: РФ, 623784, Свердловская обл., Артемовский р-н, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д.34, телефон: (343)221-47-07, факс: (343)221-47-07, e-mail: asintez@list.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

44 (сорок четыре) листов

Генеральный директор ООО «Арт-Синтез»

Елсукова Т.Б.

