


5. Названия и функции всех частей

5.1. Основные части

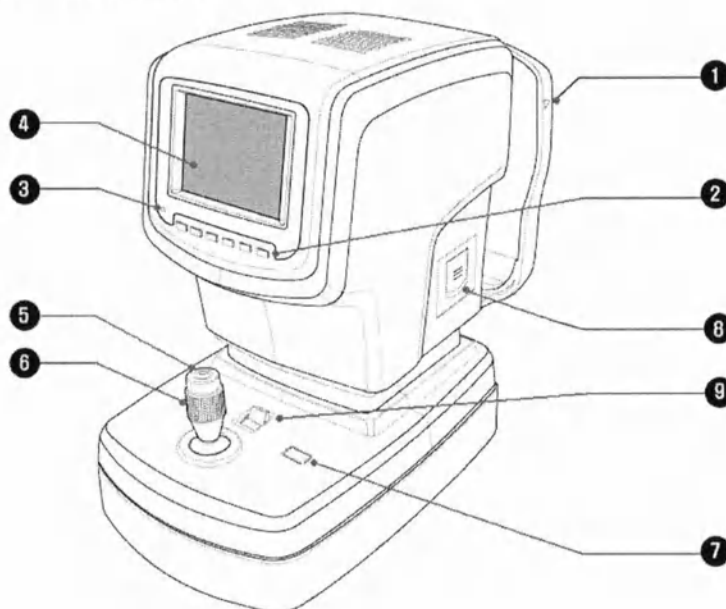

[Рис. 1. Вид спереди]

1. Отметка высоты: отмечает высоту, на которой располагаются глаза пациента.
2. Функциональные кнопки: выбор функций.
3. Индикатор включения: загорается при включении питания.
4. Экран: служит для наблюдения за измерением.
5. Кнопка измерения: при нажатии после фокусировки выполняет измерение.
6. Джойстик: регулировка фокуса путем перемещения вперед-назад, влево-вправо и вверх-вниз.
7. Кнопка печати: печать результатов измерения.
8. Печатающее устройство: печать результатов измерения.
9. Рычажок фиксации: служит для фиксации лицевого установа системы.