



Фотографические изображения
медицинского изделия

*Аппарат для криолиполиза CLATUU
с принадлежностями*

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор

ООО «Белла - С»



Ко Бум Сук

Аппарат для криолиполиза CLATUU с принадлежностями

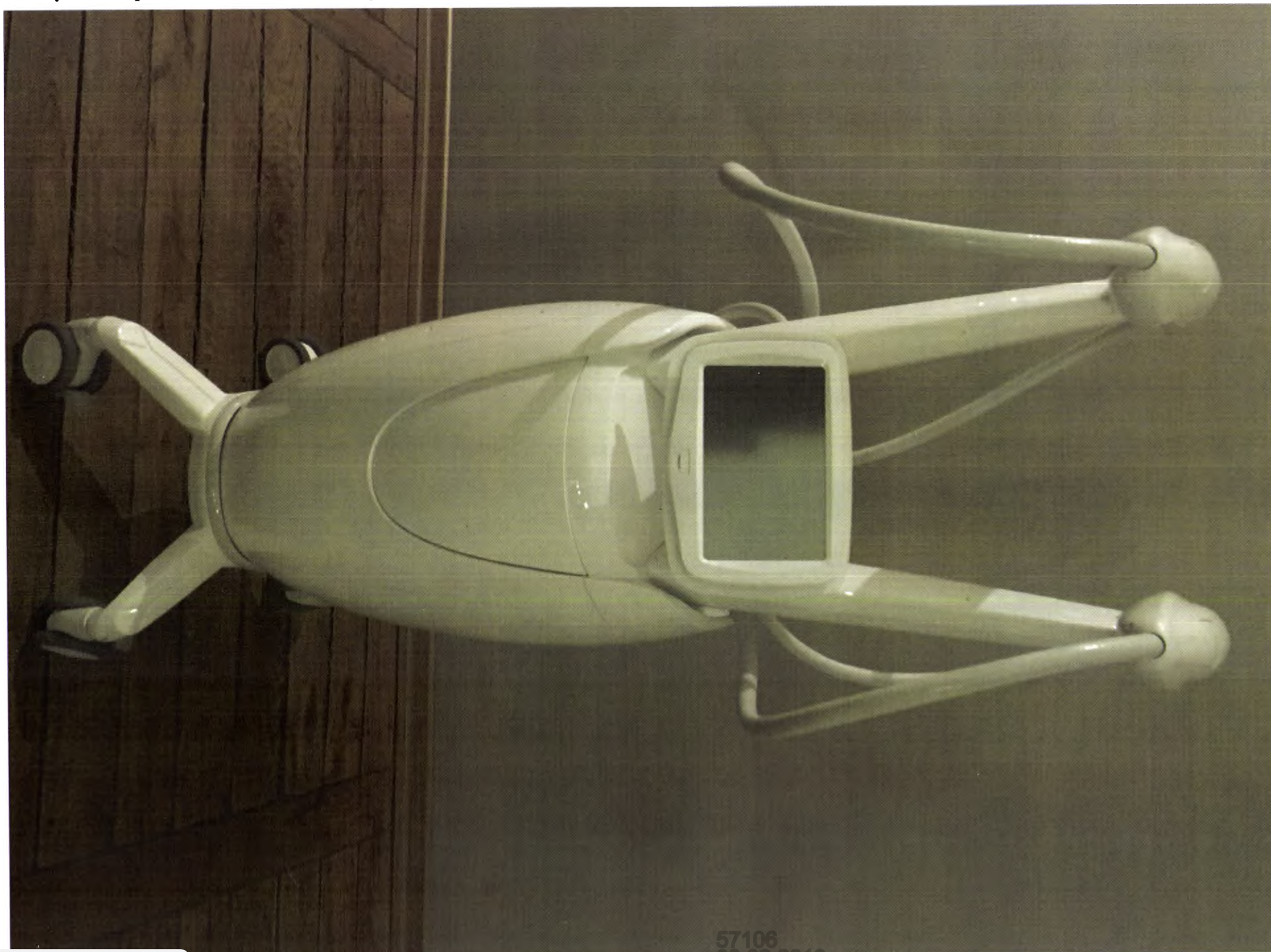

Аппарат для криолиполиза

Модель: CL2-M360



Питание: 220-240В, 50/60 Гц, 1600 ВА

Вес: 90 кг

Серийный номер: CCA18F005



06/2018



Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации



Classys Inc.

Сделано в Корее

Головной офис: 240, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea Rep


Адрес производства: A-1501~1515, 15F, H Businesspark, 25, Beobwon-ro
11- gil, Songpa-gu, Seoul, Korea Rep.

Телефон: +82-2-517-2114 Факс: +82-2-6008-3457


Вер. 03.0

I. Состав:


1. Основной блок—1 шт.

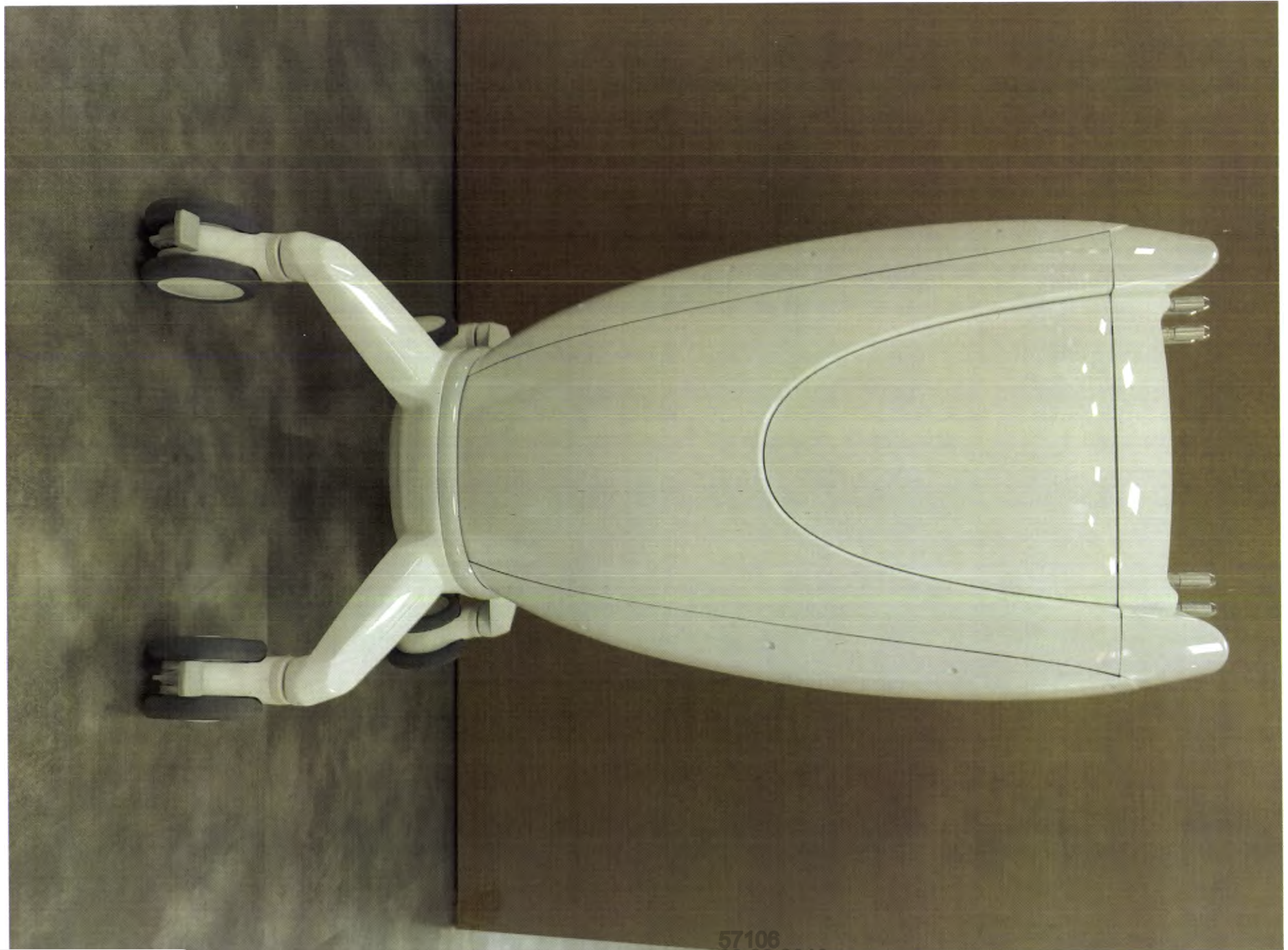

2. Кабель манипулы (с держателем) - 2 шт.

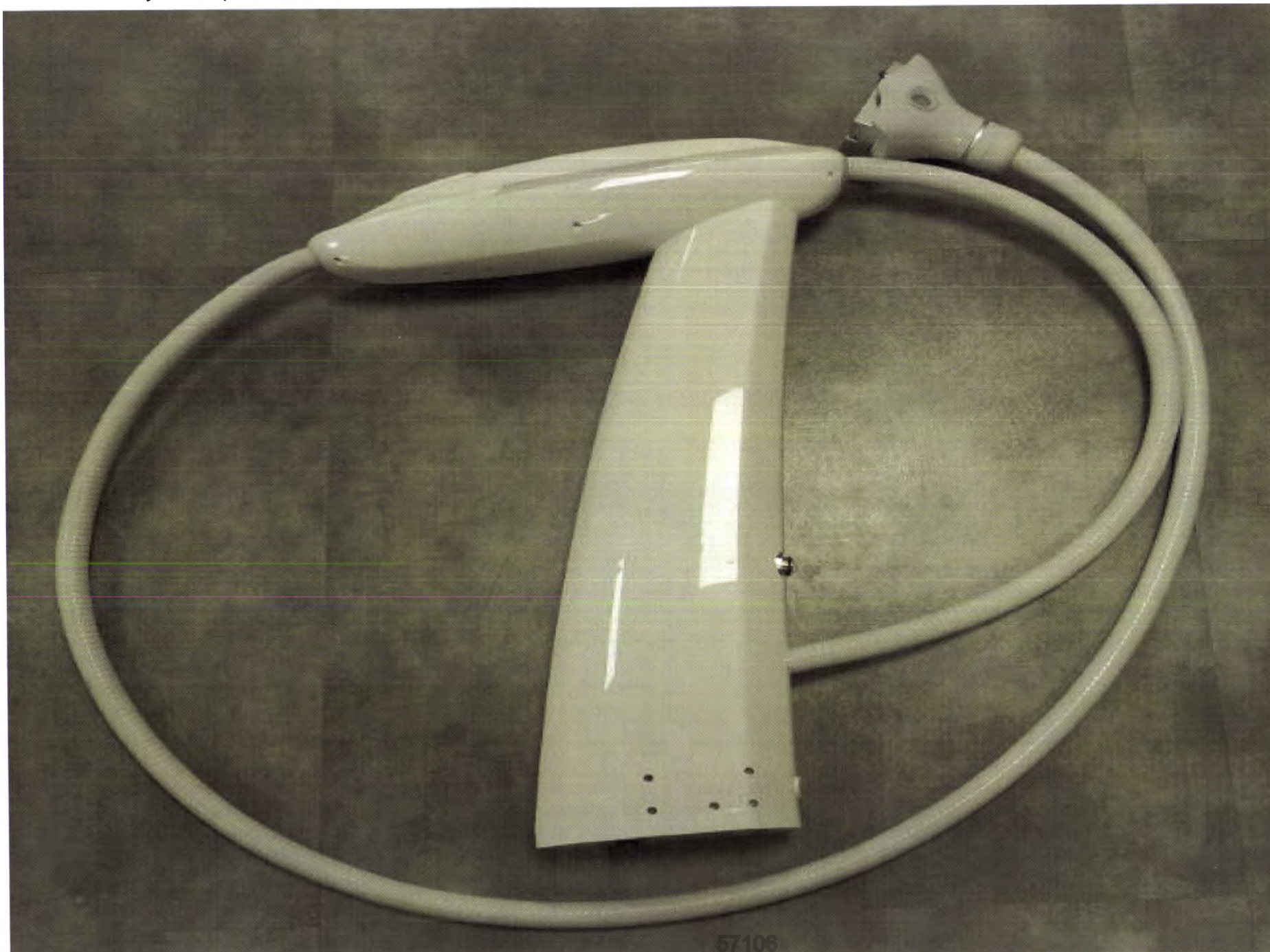


3. Манипула типа "крыло" - 2 шт.

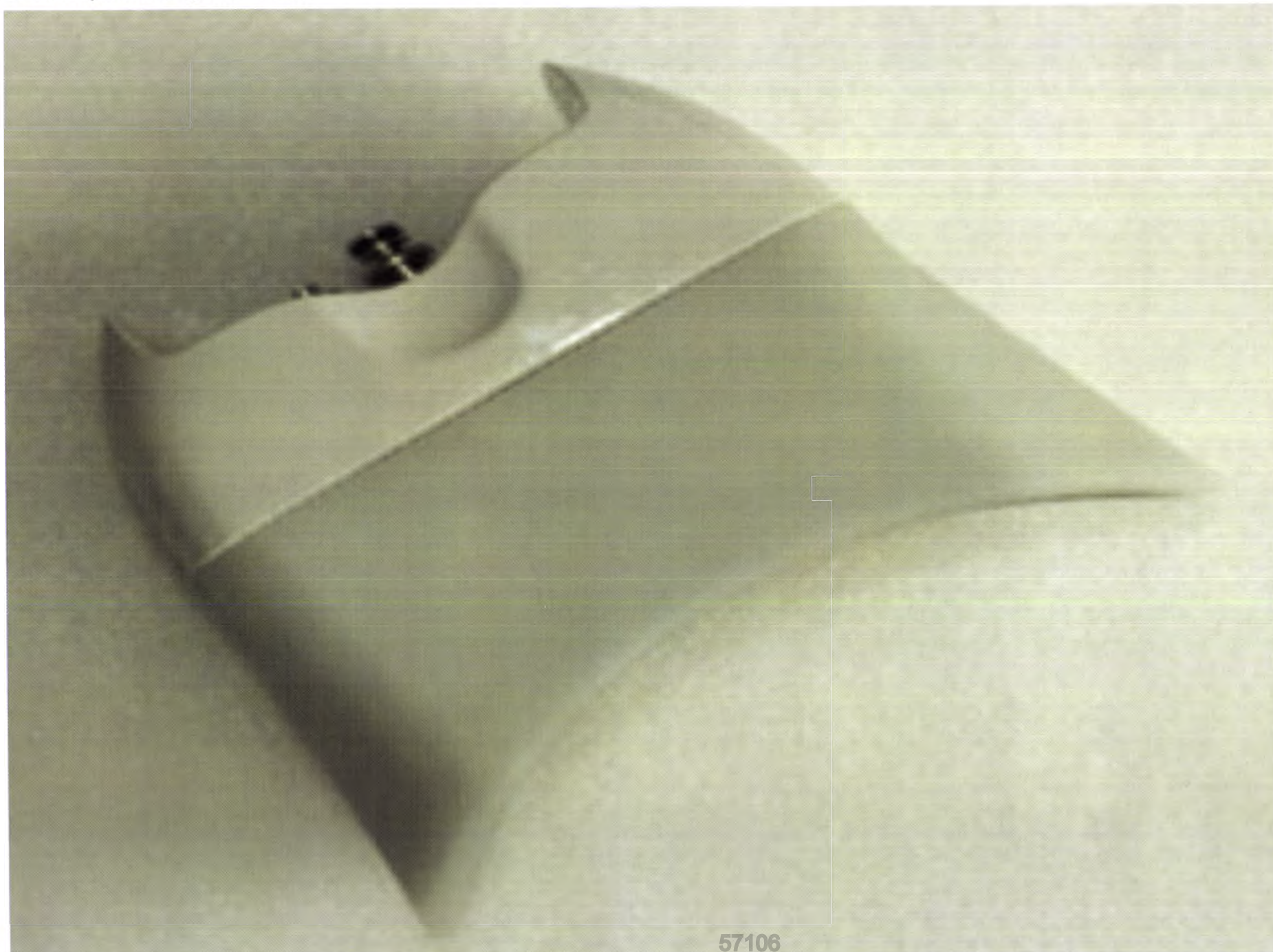


4. Манипула типа "плоскость" - 2 шт. (при необходимости).




5. Манипула типа "крыло плюс" – не более 2 шт. (при необходимости).

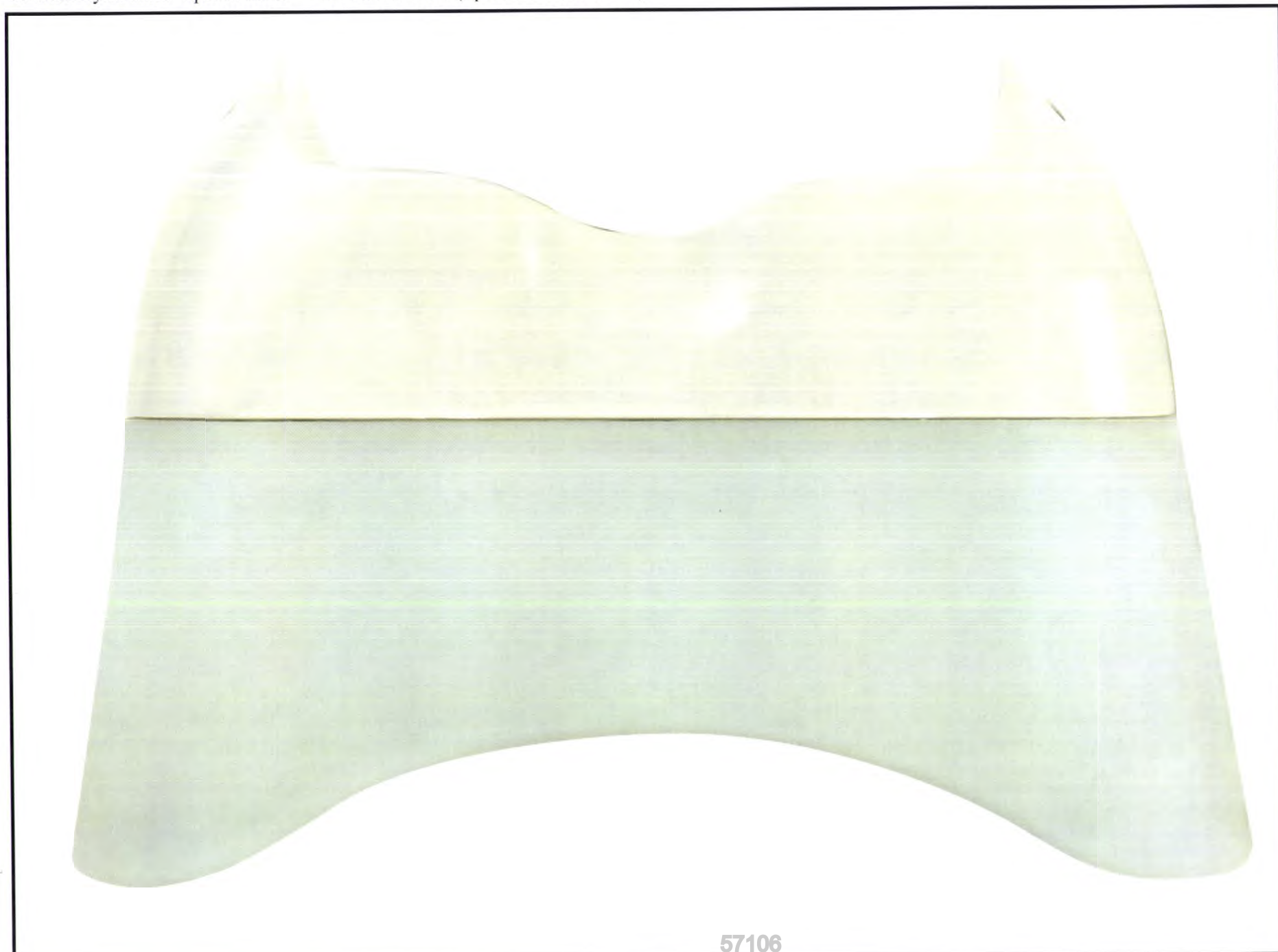


6. Манипула типа "крыло мини" – не более 2 шт. (при необходимости).

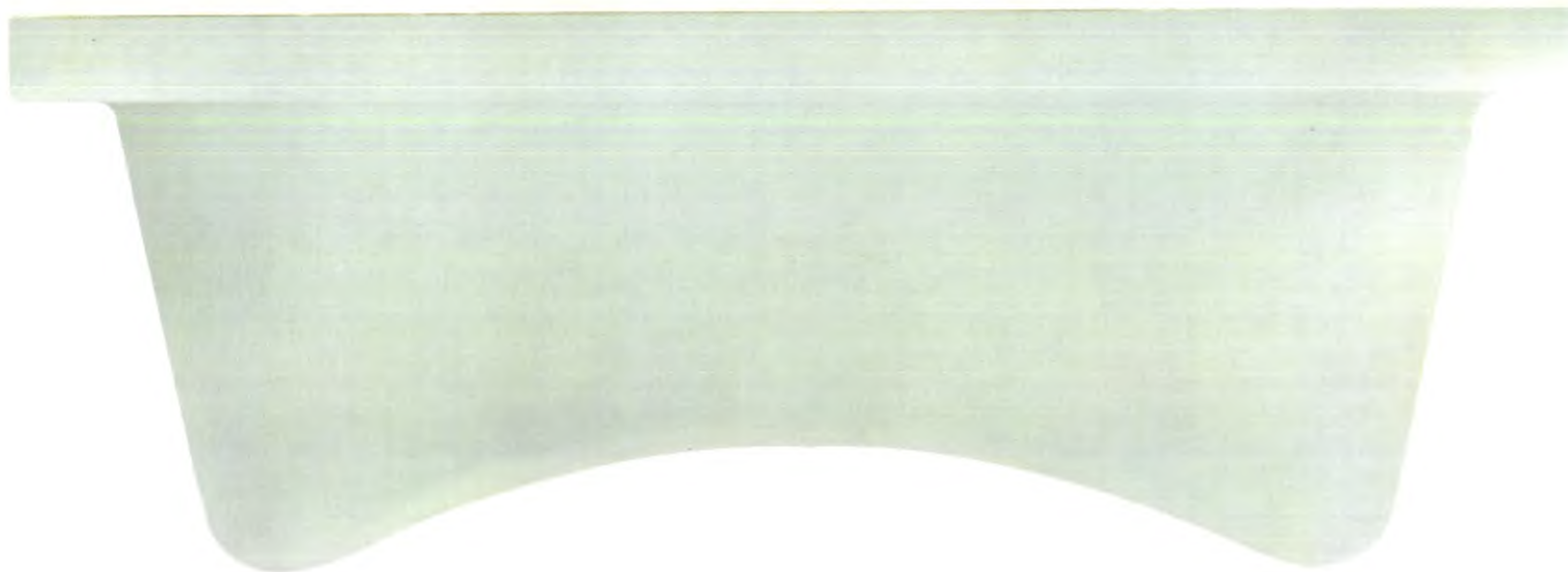


7. Манипула типа "плоскость мини" – не более 2 шт. (при необходимости).

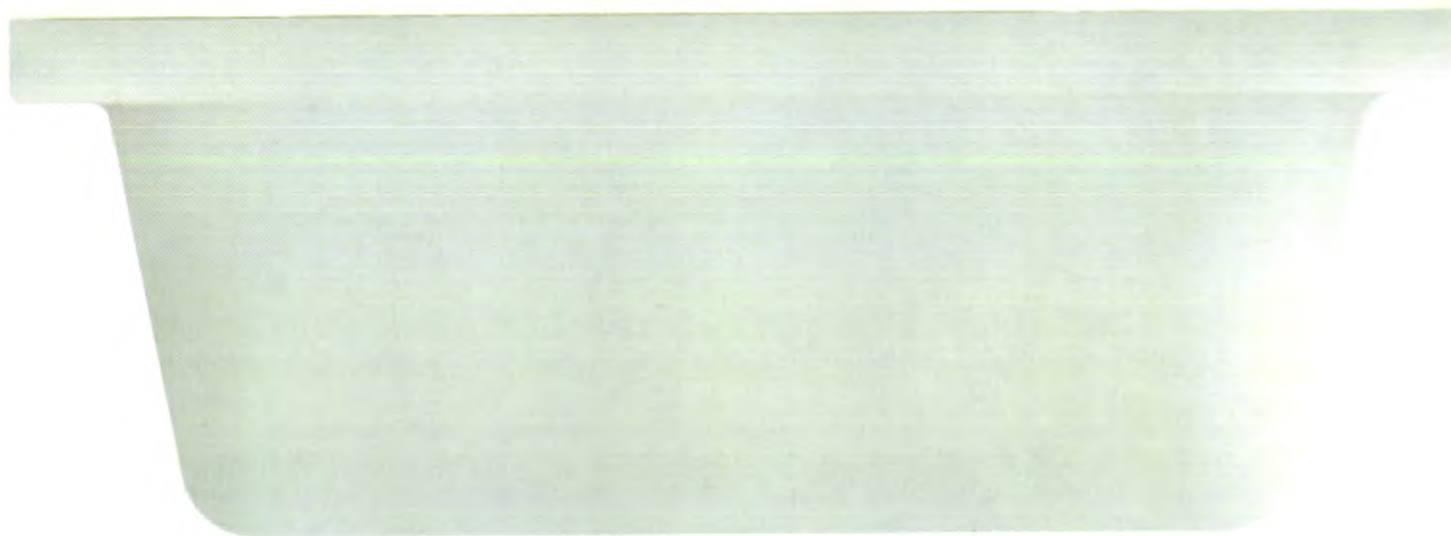


8. Манипула типа ARC-T – не более 2 шт. (при необходимости).

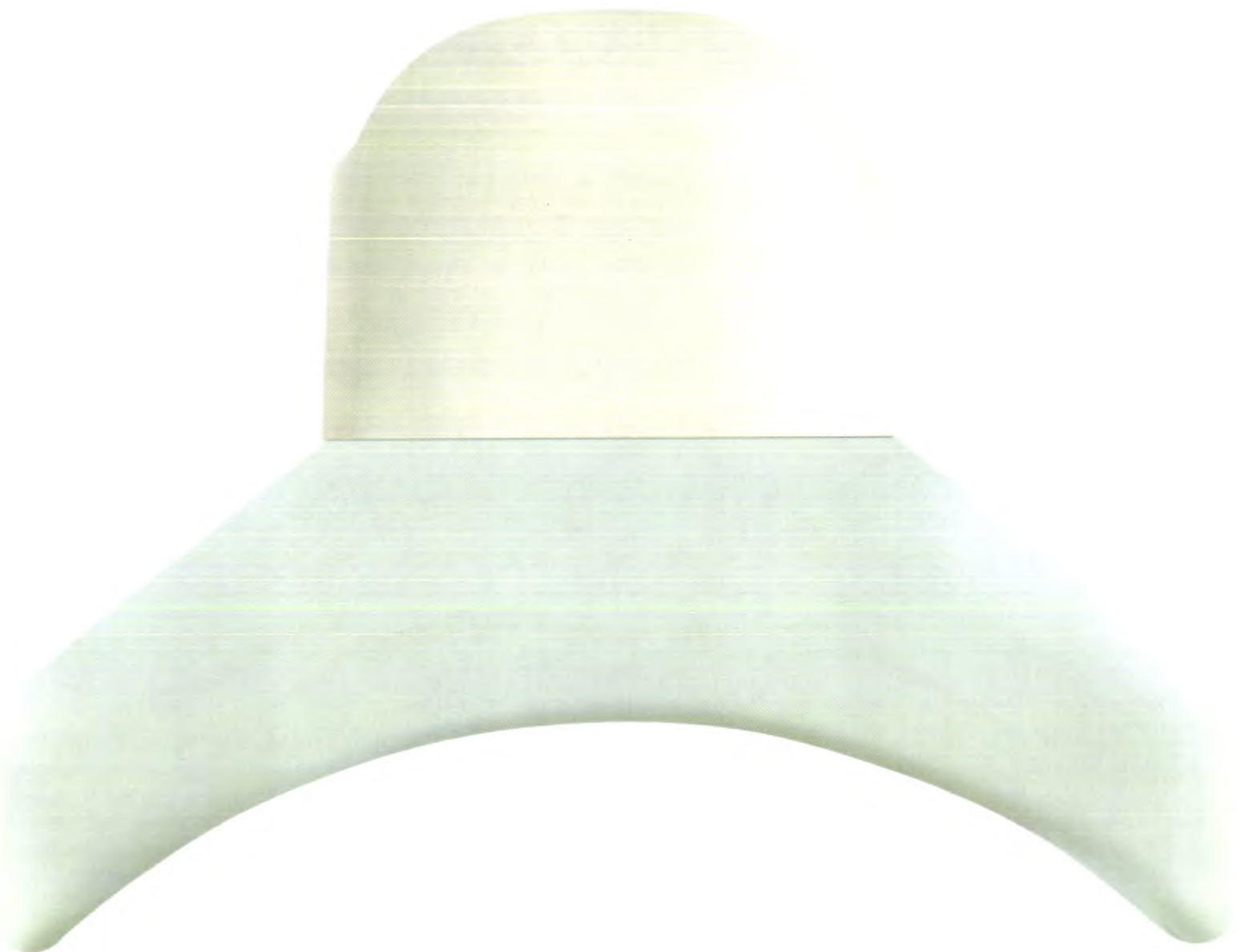


9. Манипула типа ARC-A – не более 2 шт. (при необходимости).

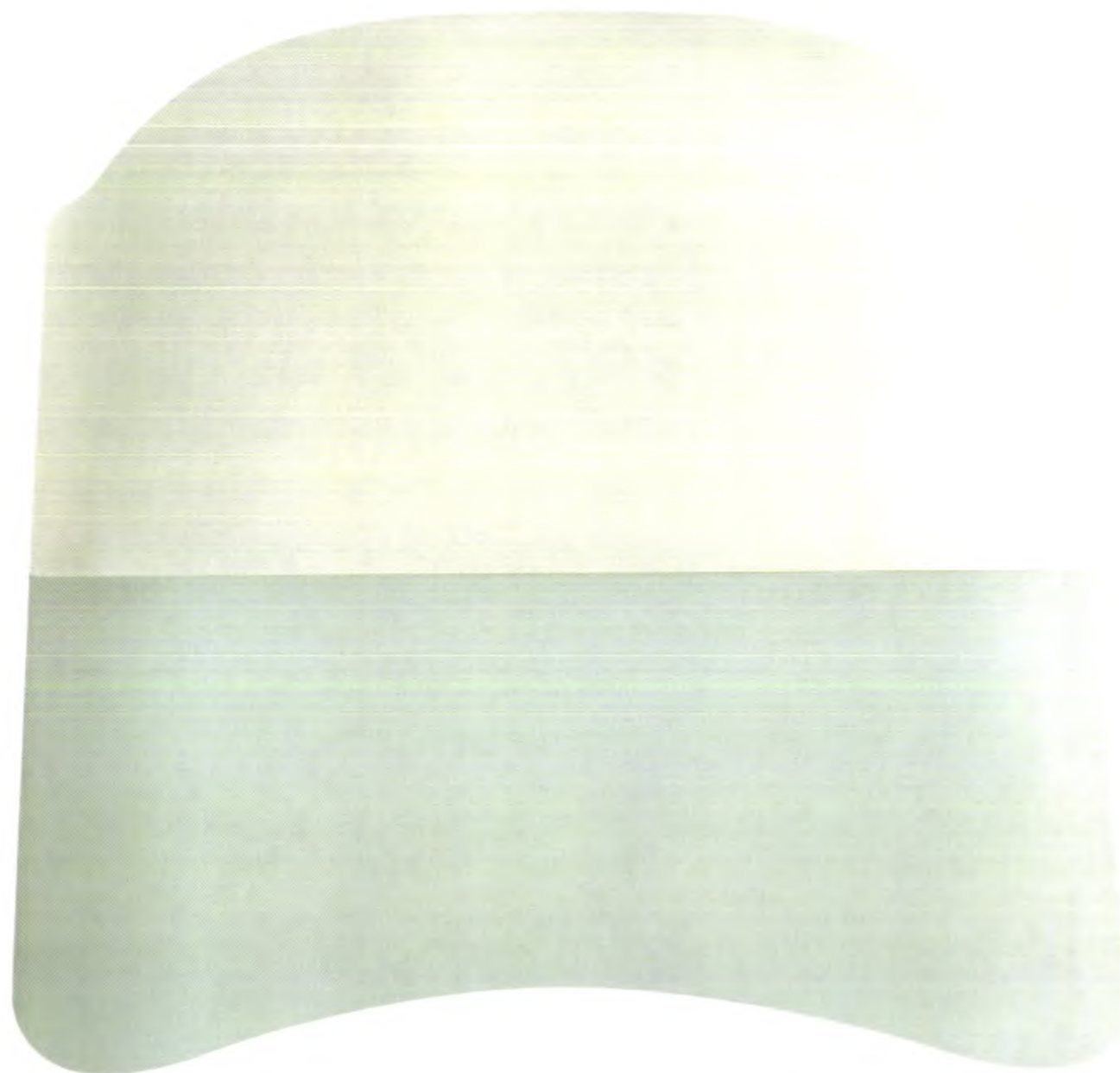

10. Направляющая для манипулы типа «крыло» - не более 2 шт. (при необходимости).

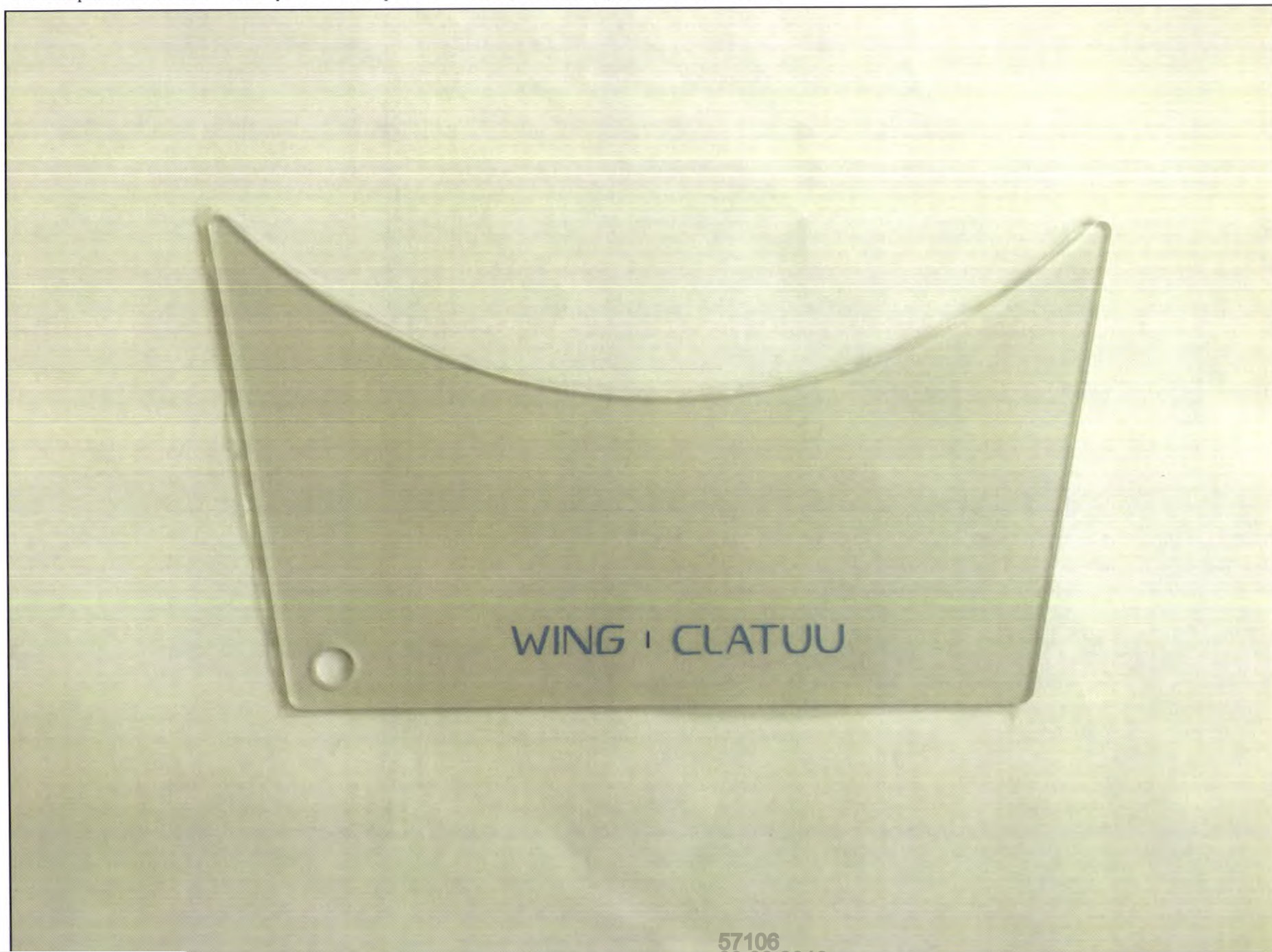


11. Направляющая для манипулы типа «плоскость» - не более 2 шт. (при необходимости).

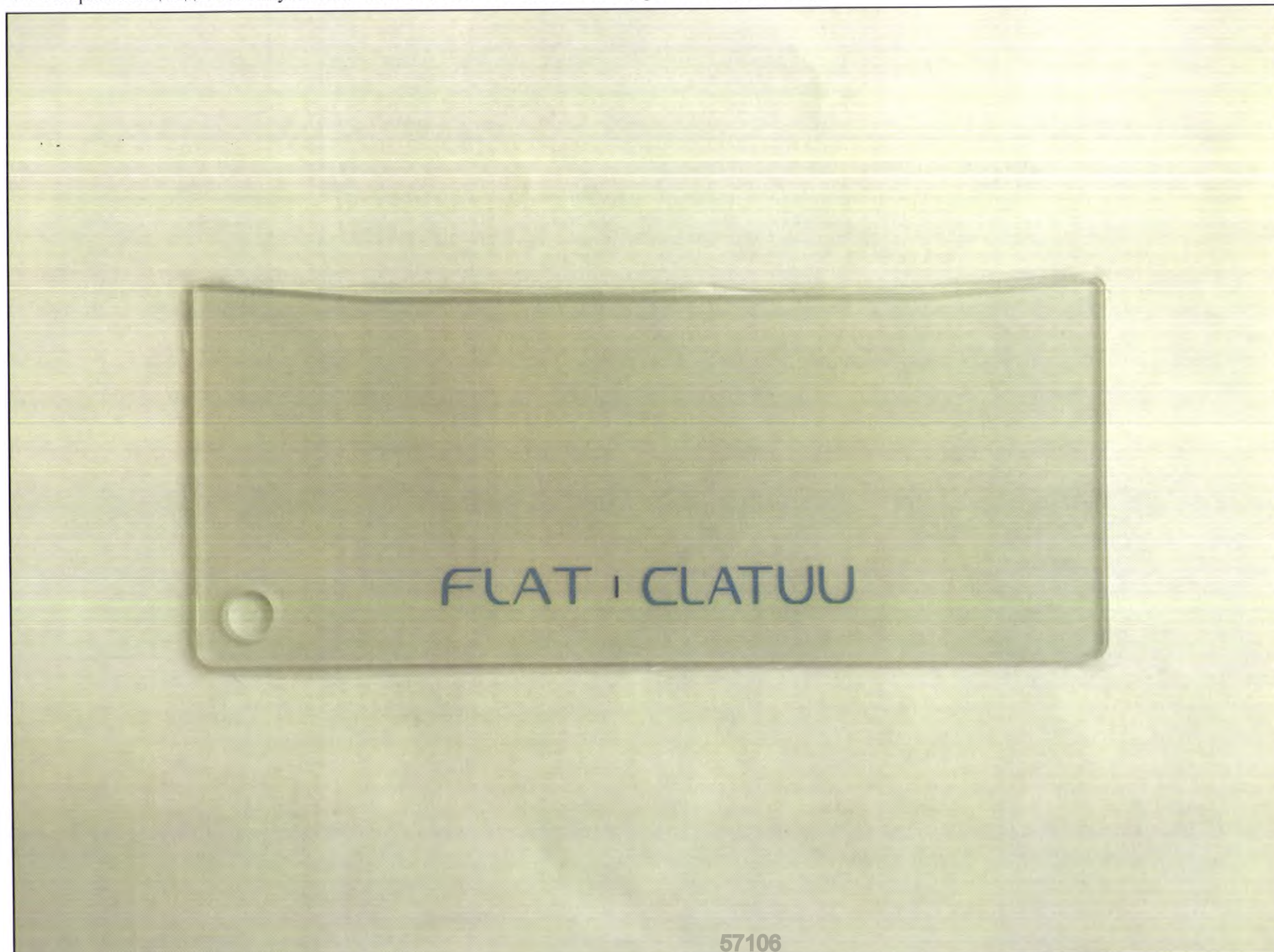

12. Направляющая для манипулы типа «крыло плюс» - не более 2 шт. (при необходимости).




13.Направляющая для манипулы типа «крыло мини» - не более 2 шт. (при необходимости).

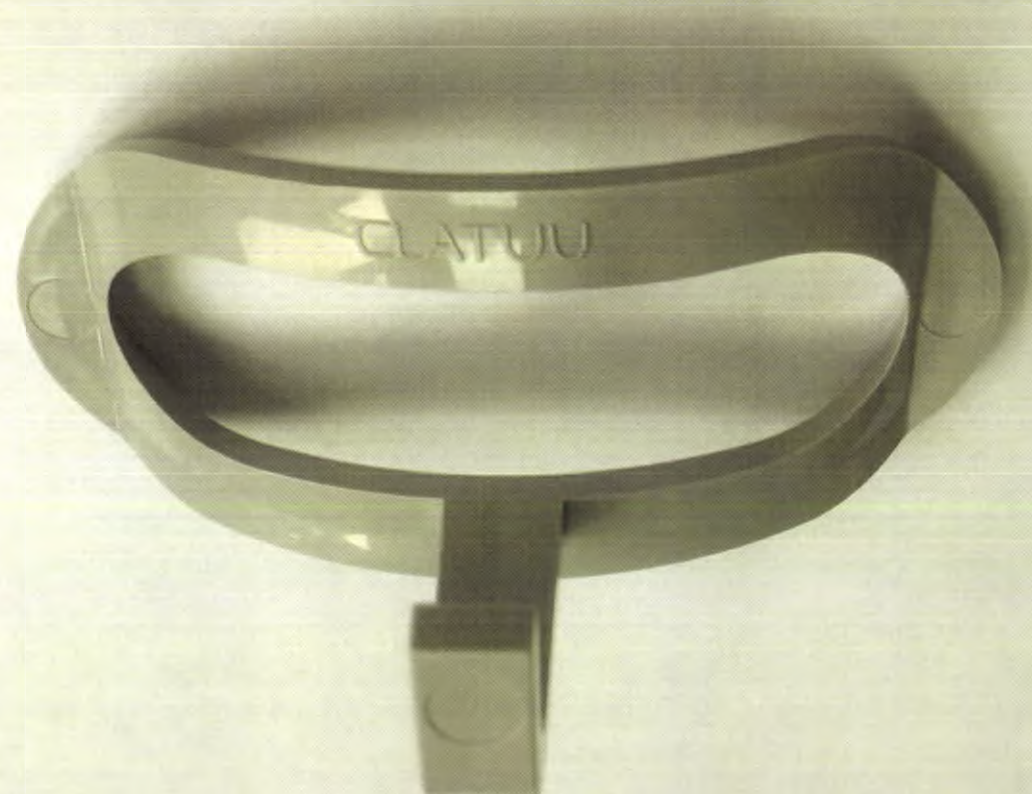


14. Направляющая для манипулы типа «плоскость мини» - не более 2 шт. (при необходимости).




15. Коврик матричный гелевый Matrix Gel Pad - не более 10 уп. (50 шт./уп.) (при необходимости).

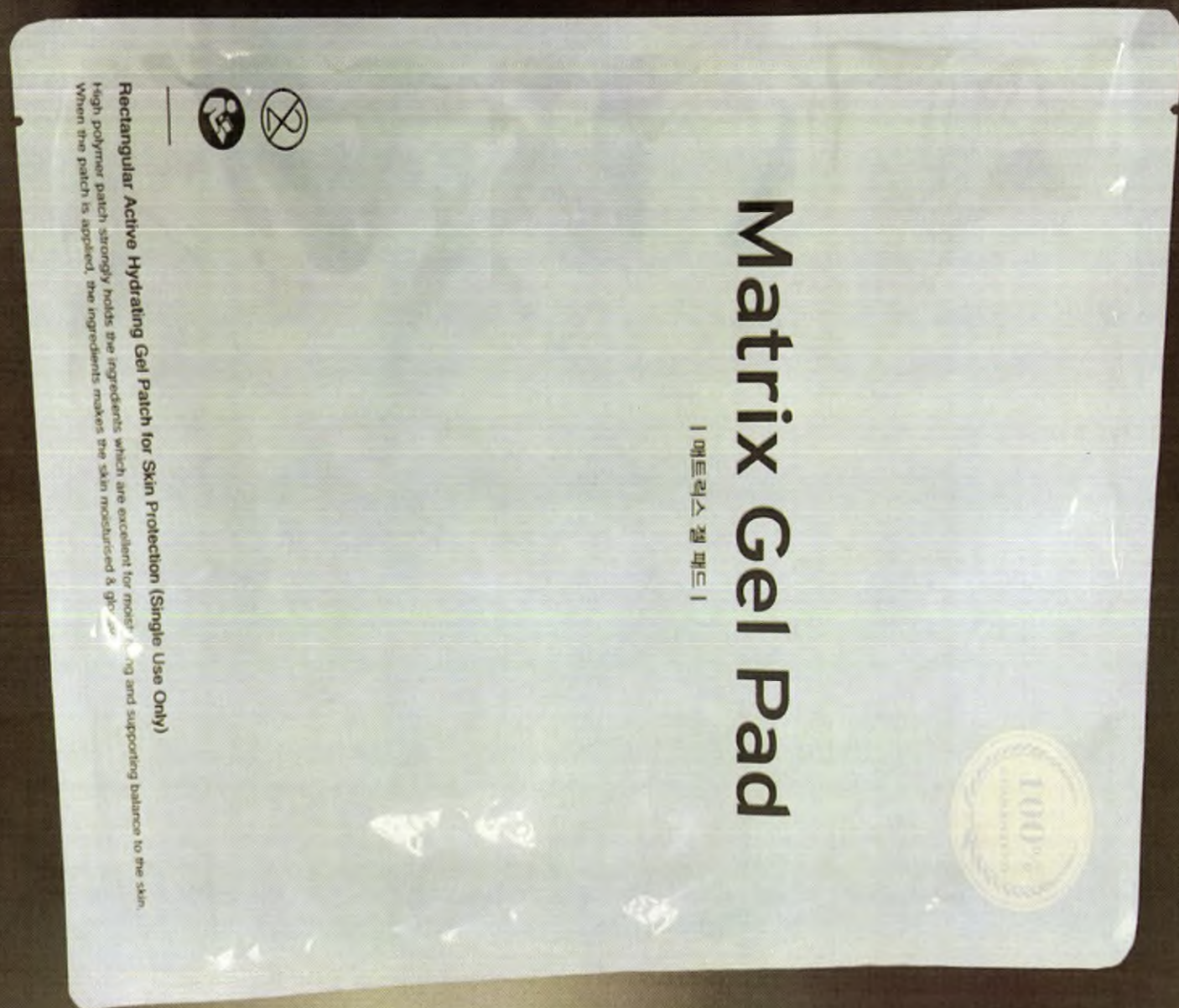


15. Коврик матричный гелевый Matrix Gel Pad - не более 10 уп. (50 шт./уп.) (при необходимости).

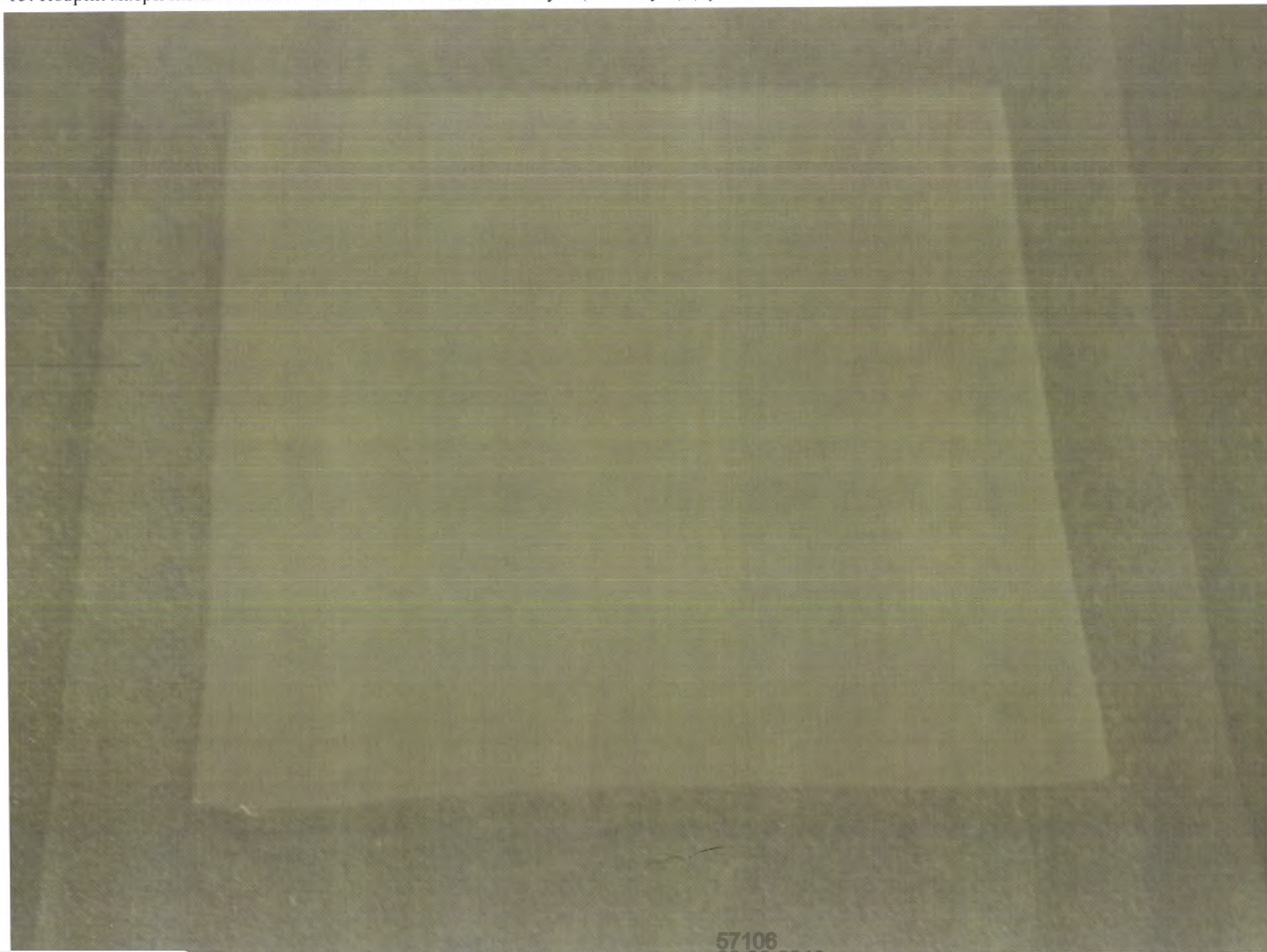

16. Коврик OP Pad - не более 10 уп. (50 шт./уп.) (при необходимости).

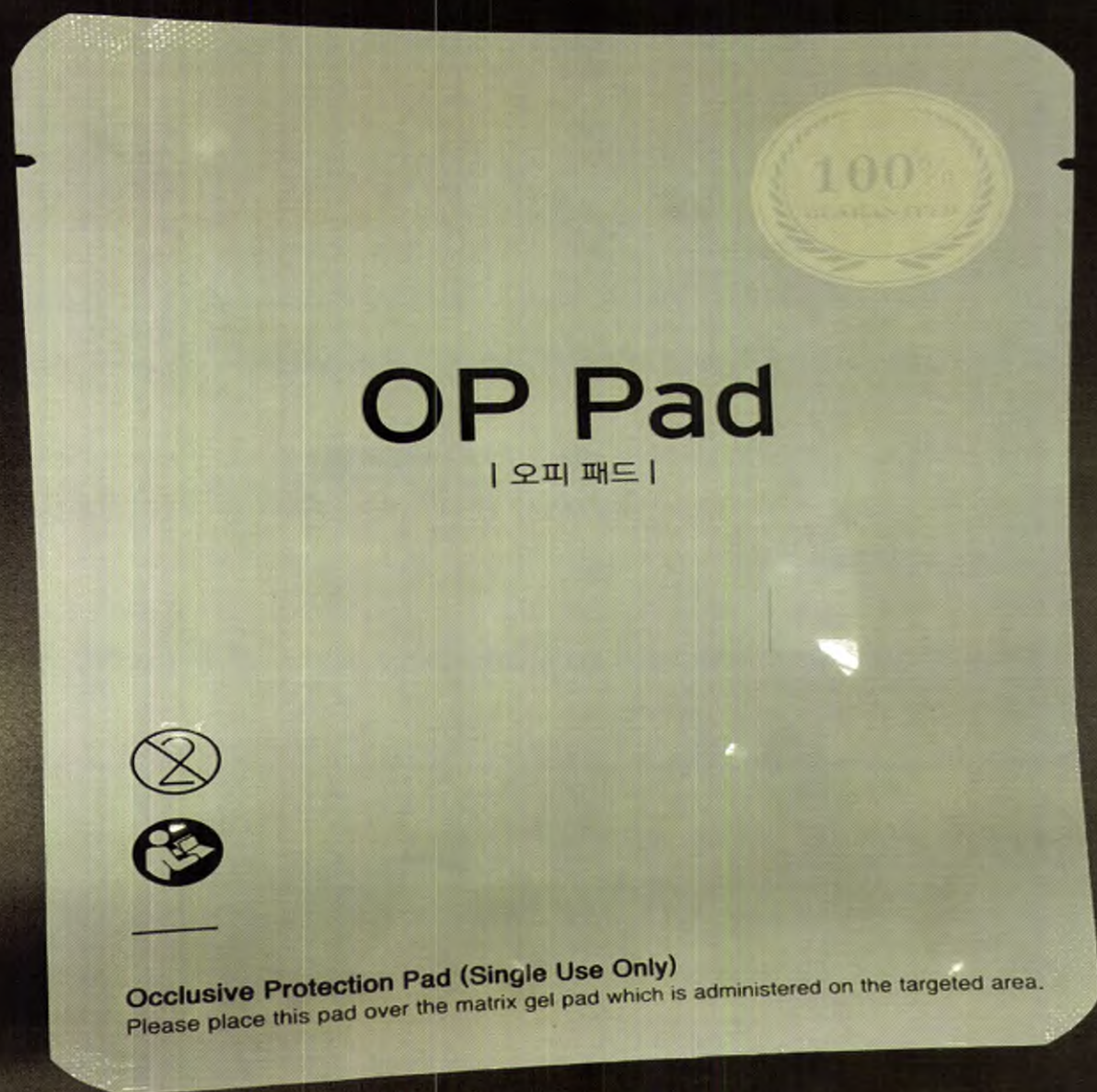

16. Коврик ОР Pad - не более 10 уп. (50 шт./уп.) (при необходимости).

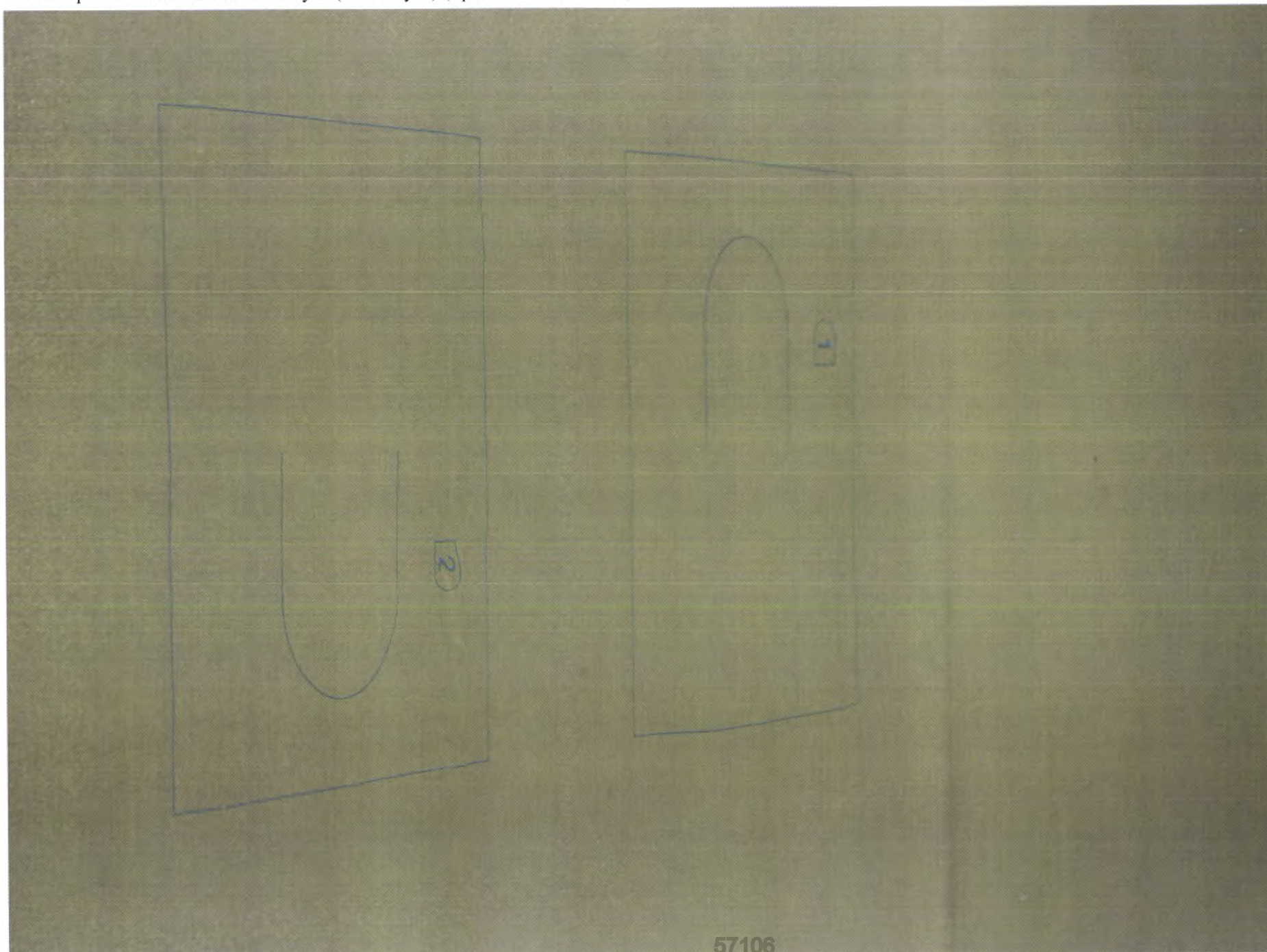

17. Сетевой кабель - 1 шт.



18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

СЛЕДУЮЩИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
вер. 1.0

Краткое руководство по эксплуатации СЛАТУ

Ред. 1.0_1



- 1 С помощью Руководства выберите тип манипулы

Противопоказания

- СЛАТУ противопоказан следующим группам пациентов:
- Беременные или кормящие женщины
- При кожных инфекционных заболеваниях
- При противопоказаниях



- 2 Подсоедините манипулу

Меры предосторожности для пациента

- Перед проведением процедуры следует проверить отсутствие противопоказаний у пациентов со следующими заболеваниями:
- Холодовая аллергия или боязнь режю
 - Незащищенность периферического кровообращения в зоне лечения
 - Неврология, например, диабетическая невропатия или постгерпетическая невралгия
 - Кожная дисгезия
 - Открытые или инфицированные раны
 - Пыльница кровянистая или одонтогенный гнойный ангиолуговитов
 - Недавняя операция или рубцовая ткань в области воздействия
 - Кожные заболевания, например, экзема, дерматит или скарл
 - Грыжи



- 3 Проверьте статус SAT-карты



- 4 Установите параметры

Меры предосторожности при проведении процедуры

- Меры безопасности во время проведения процедуры с аппаратом СЛАТУ:**
- Эксплуатация аппарата СЛАТУ запрещена лицам, не прошедшим обучение у уполномоченного представителя CLASSYS.
 - Во избежание несанкционированного использования аппарата необходимо убедиться, что доступ к нему имеют только лица, прошедшие обучение и сертифицированы.
 - Запрещается воздействовать на область, где кости близко расположены к поверхности кожи, и области, через которые проходят нервы.
 - При повреждении неинструментов или некачественных изделий следует немедленно прервать процедуру.
 - До начала процедуры на аппарате СЛАТУ всегда располагайте защитный экран СЛАТУ на целевой зоне для защиты кожи.
 - Перед тем, как активировать воздействие, убедитесь, что манипула должным образом установлена на коже.
 - Не используйте манипулу СЛАТУ под углом 45° и более и не надавливайте на манипулу для обеспечения полного контакта с кожей.



- 5 Расположите защитный экран СЛАТУ



- 6 Установите манипулу



- 7 Отсоедините манипулу

Безопасное использование системы

- Меры по обеспечению безопасности системы и надлежащую техническую эксплуатацию аппарата СЛАТУ:**
- Перед началом работы следует всегда проверять целостность манипулы и кабеля, чтобы устранить риск удара электрическим током.
 - Запрещается использовать кабель, который был поврежден или из которого вытекает жидкость.
 - Запрещается снимать крышку с основного блока СЛАТУ или манипулы, так как модификация оборудования недоступна.
 - Оборудование СЛАТУ не имеет компонентов и узлов, которые позволяют модифицировать самостоятельно. Если необходимо провести техническое обслуживание системы, следует связаться с местным дистрибьютором или компанией CLASSYS INC.
 - Запрещается облокачиваться на оборудование или режю его детали и толкать, так как это может привести к необратимому повреждению системы.
 - Запрещается использовать оборудование вблизи порочных плазм или электроионизирующих средств.
 - Убедитесь, что используете защитный экран СЛАТУ, произведенный и предоставленный компанией CLASSYS.





CLATUU
Безграничные возможности



—
Руководство по проведению
терапевтической процедуры
Редакция 1.0_1

 **CLASSYS**
Technology for better life

Криотерапия против жира

CLATUU

Никаких ограничений



II. Принадлежности:


1. Подушка обычная - не более 2 шт.



2. Подушка закругленная - не более 2 шт.



3. Подушка для шеи - не более 2 шт.

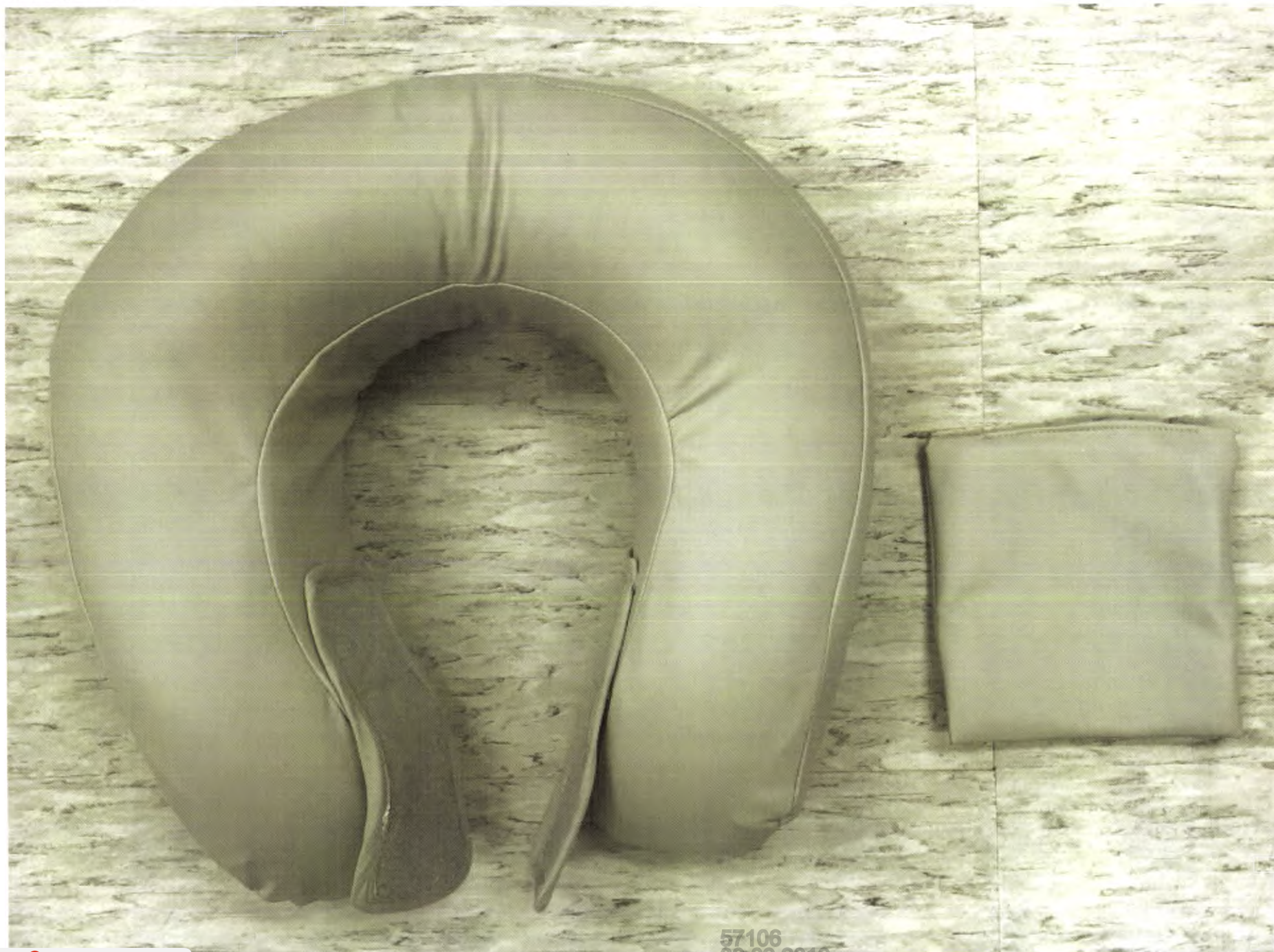


4. Фиксирующий ремень для обычной подушки - не более 4 шт.




5. Воронка для дистиллированной воды - 1 шт.




6. Кронциркуль для складок кожи - 1 шт.

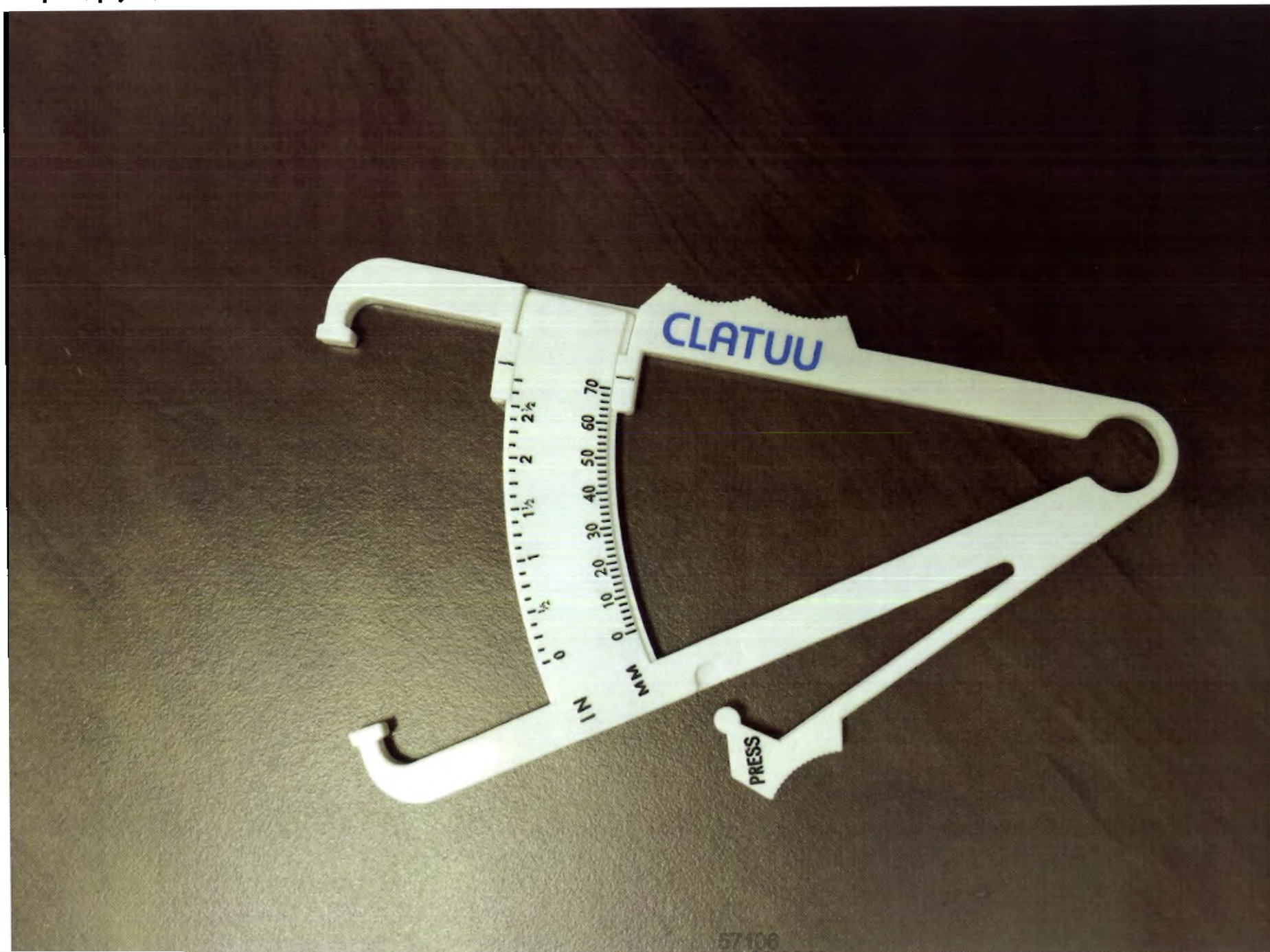


7. Коврик защитный CLATUU Shield 360 (тип А) - не более 20 уп. (50 шт./уп.) (при необходимости).

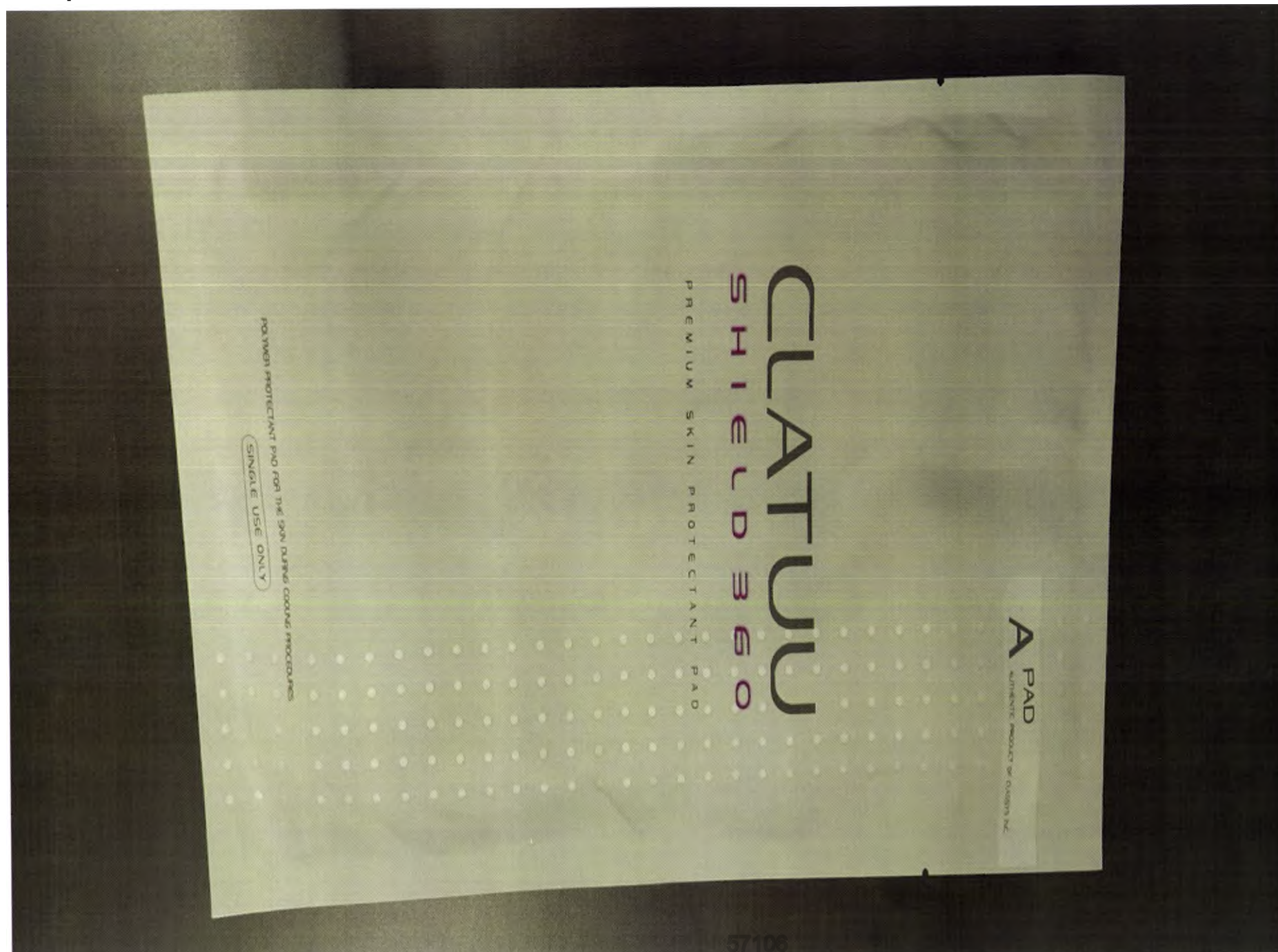


7. Коврик защитный CLATUU Shield 360 (тип А) - не более 20 уп. (50 шт./уп.) (при необходимости).

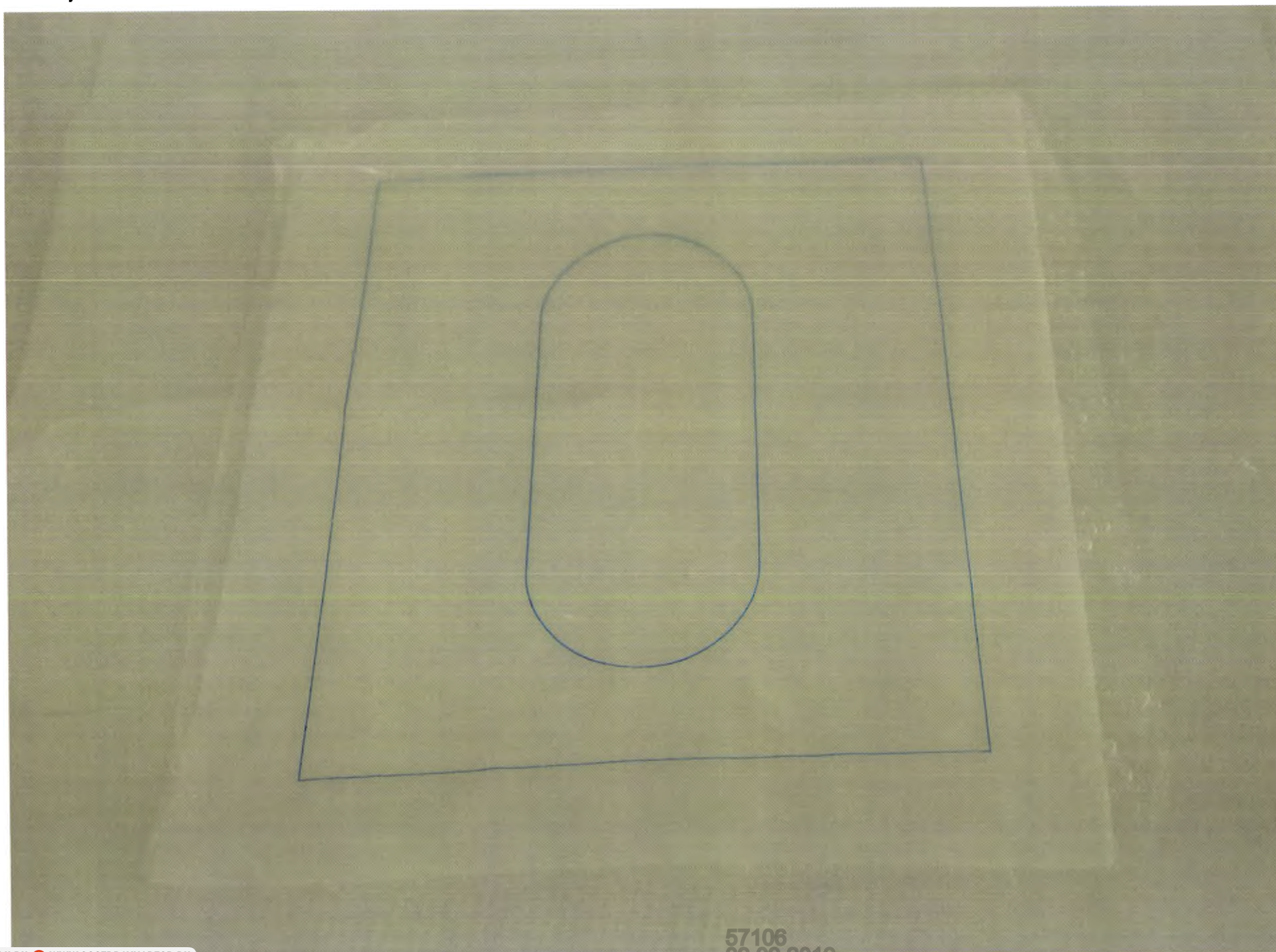


8. Коврик защитный CLATUU Shield 360 (тип С) - не более 20 уп. (50 шт./уп.) (при необходимости).

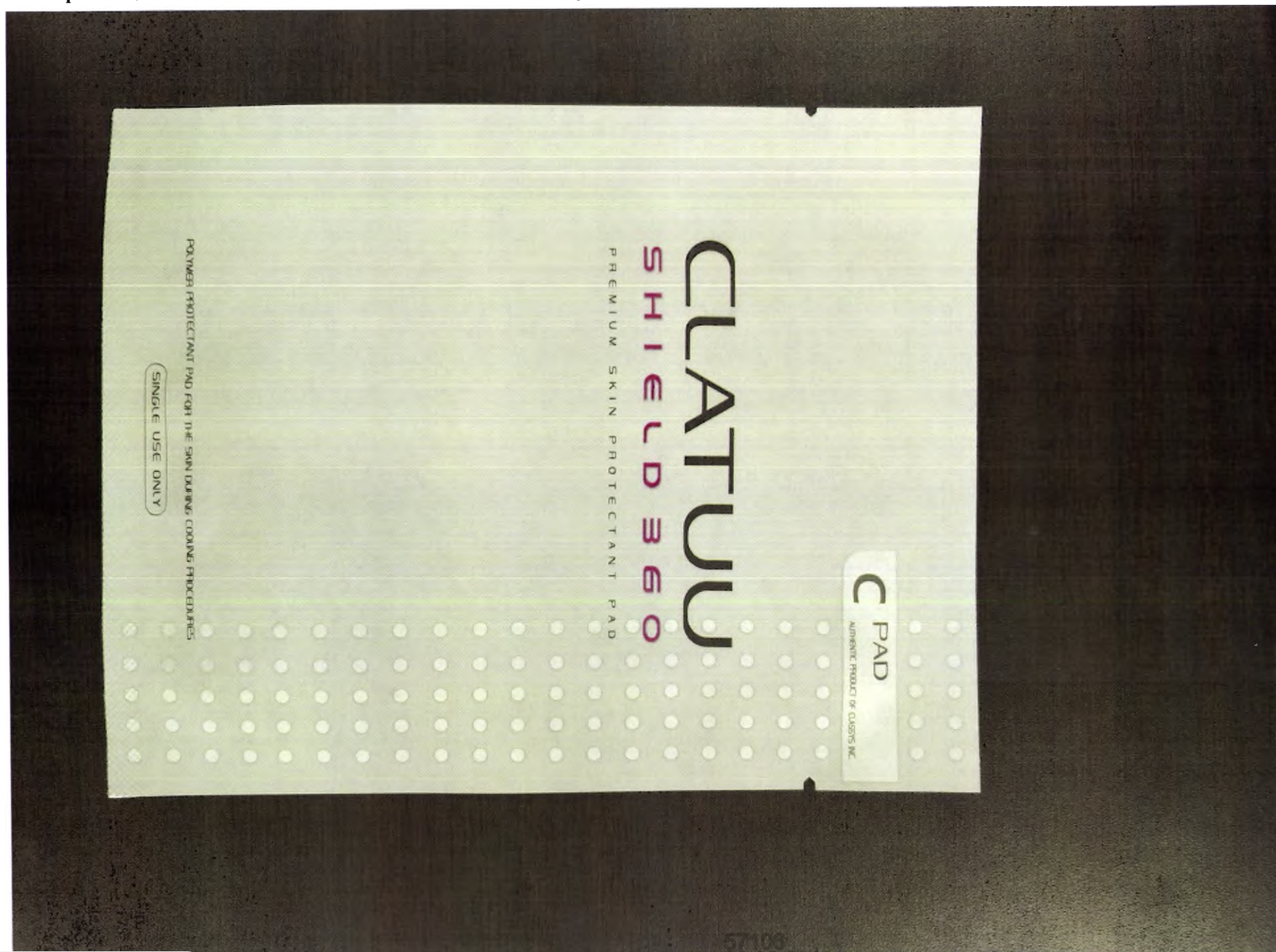

8. Коврик защитный CLATUU Shield 360 (тип С) - не более 20 уп. (50 шт./уп.) (при необходимости).

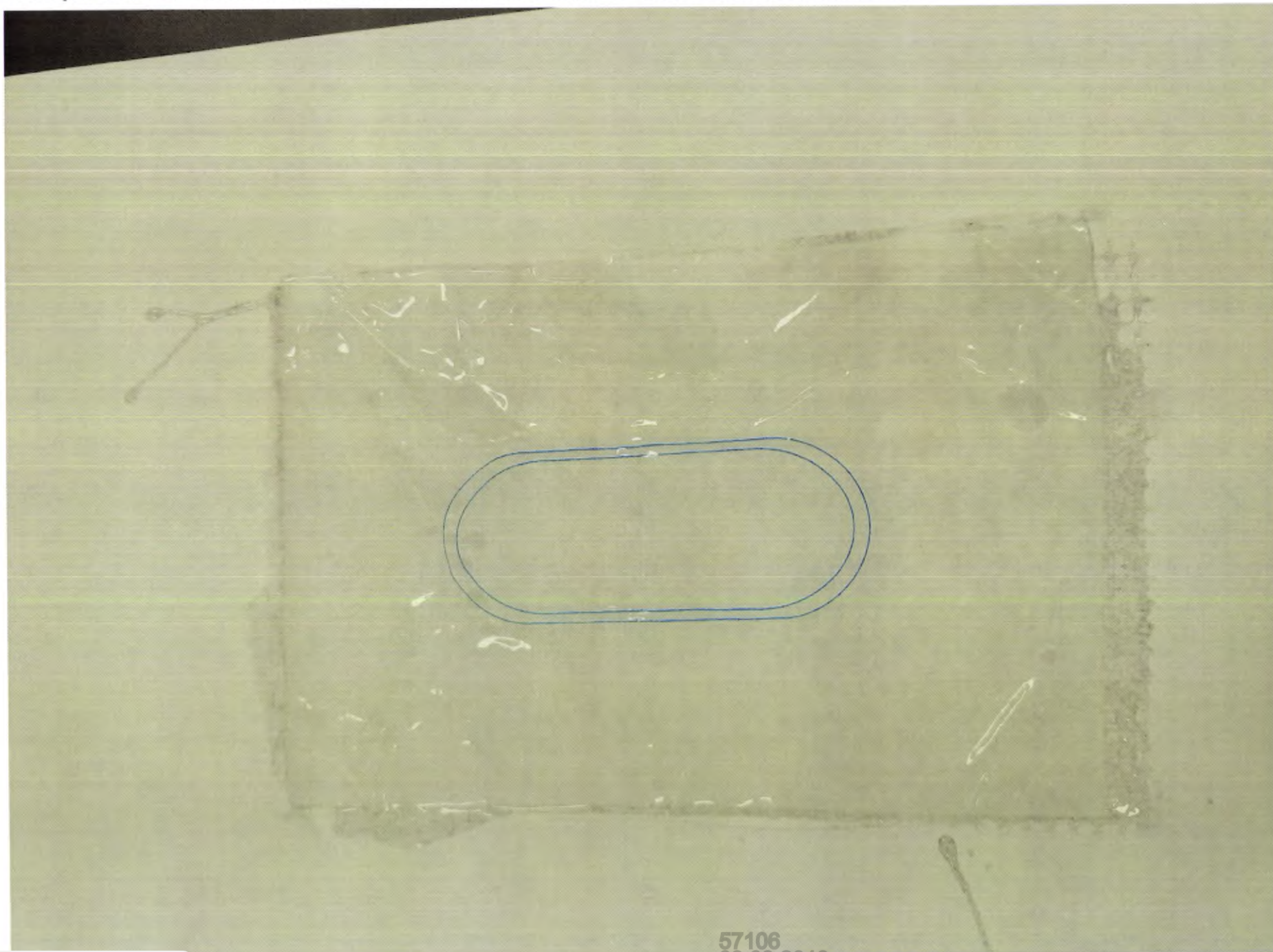

9. Карта памяти SAT Card (совместно с руководством по эксплуатации SAT-карты) – не более 20 шт.

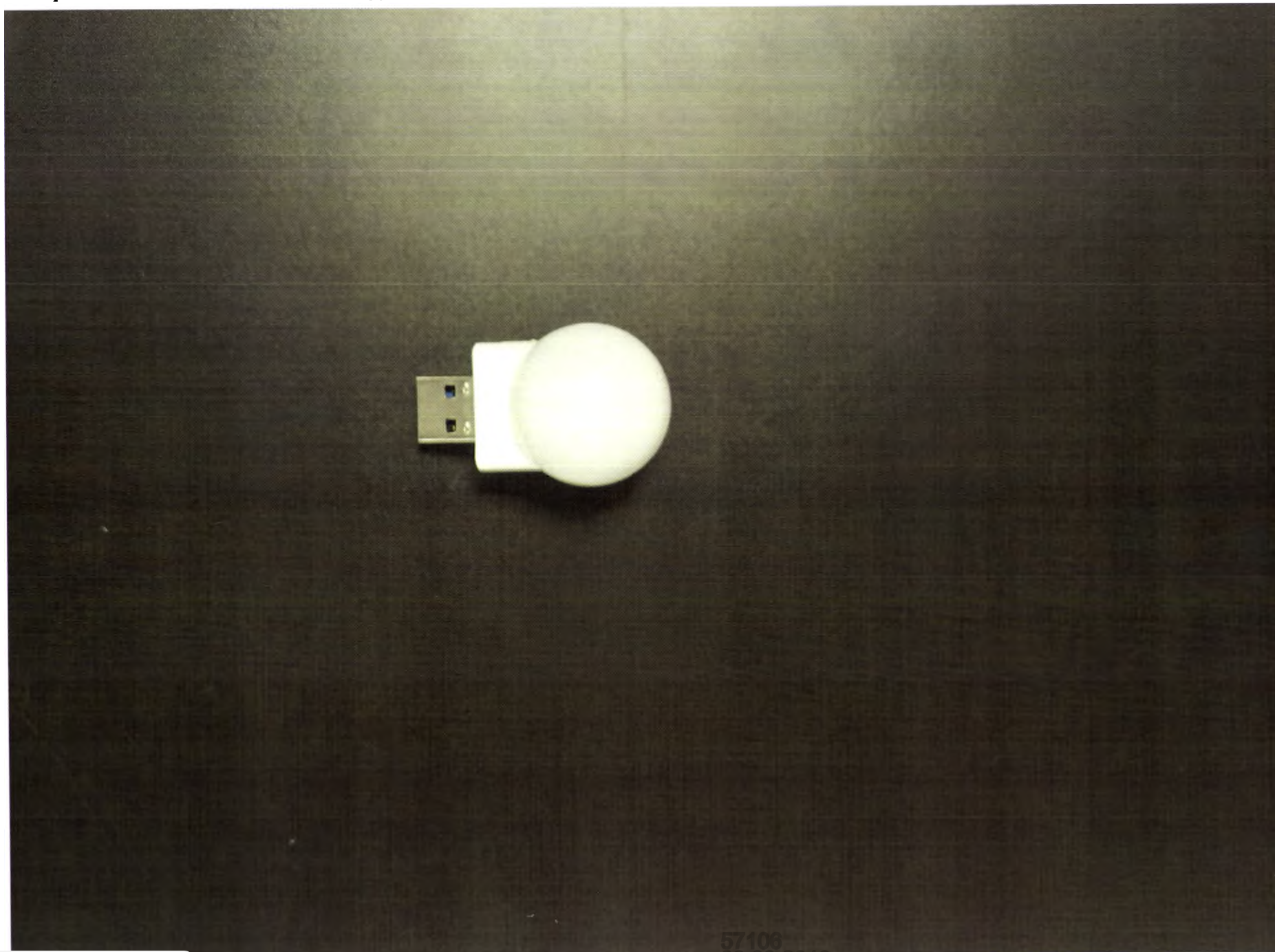

Руководство по эксплуатации SAT-карты SLATU

Ред. 1.0_1

Карта SAT (жетон доступа в систему)

Компонент SLATU, специально разработанный для надежного и безопасного использования вместе с защитным кодомом SLATU во время процедур.

Информация о продукте (SAT-карта)

Тип	Количество
SAT-карта	1
Кодовый защитный SLATU	50

SAT-карта


Примечание

Для индикации количества оставшихся процедур лечения при использовании в настоящее время SAT-карты (всего доступно 50 процедур).

Меры предосторожности

- Оставшееся количество отображается на 1 при использовании КАЖДОЙ монитрулы.
- Оставшееся количество отображается на 2 при использовании ОБЕИХ монитрул.
- Вычитание количества процедур происходит через 2 минуты после начала процедуры.
- В случае, если защитный код не зафиксирован должным образом, в течение двух минут необходимо встать и повторно наложить новый защитный кодрик, в этом случае с SAT-карты не будет списано ни одной процедуры.
- Если счетчик оставшихся процедур лечения достигнет нуля (0), для проведения процедуры необходимо вставить новую SAT-карту с достаточным количеством оставшихся процедур.
- Прежде чем приступить к лечению, убедиться, что имеется достаточное количество оставшихся процедур.
- Если по прошествии длительного периода обнаруживается какая-либо ошибка приложения, процедуру необходимо прервать из соображений безопасности.

Функционирование SAT-карты

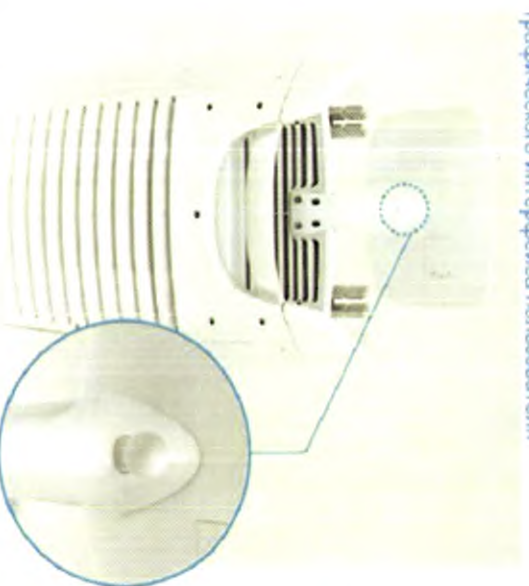

Установка карты безопасности и дисплея графического интерфейса пользователя

Отображение оставшегося количества процедур



⚠ Внимание!

Установка SAT-карты в постороннее устройство или постороннего USB-кабеля в USB-порт SAT-карты может привести к сбоям в работе.


10. Контейнер для сбора масла – 1 шт.



11. Рулетка измерительная—1 шт.



12. Коврик позиционный для ног—1 шт.

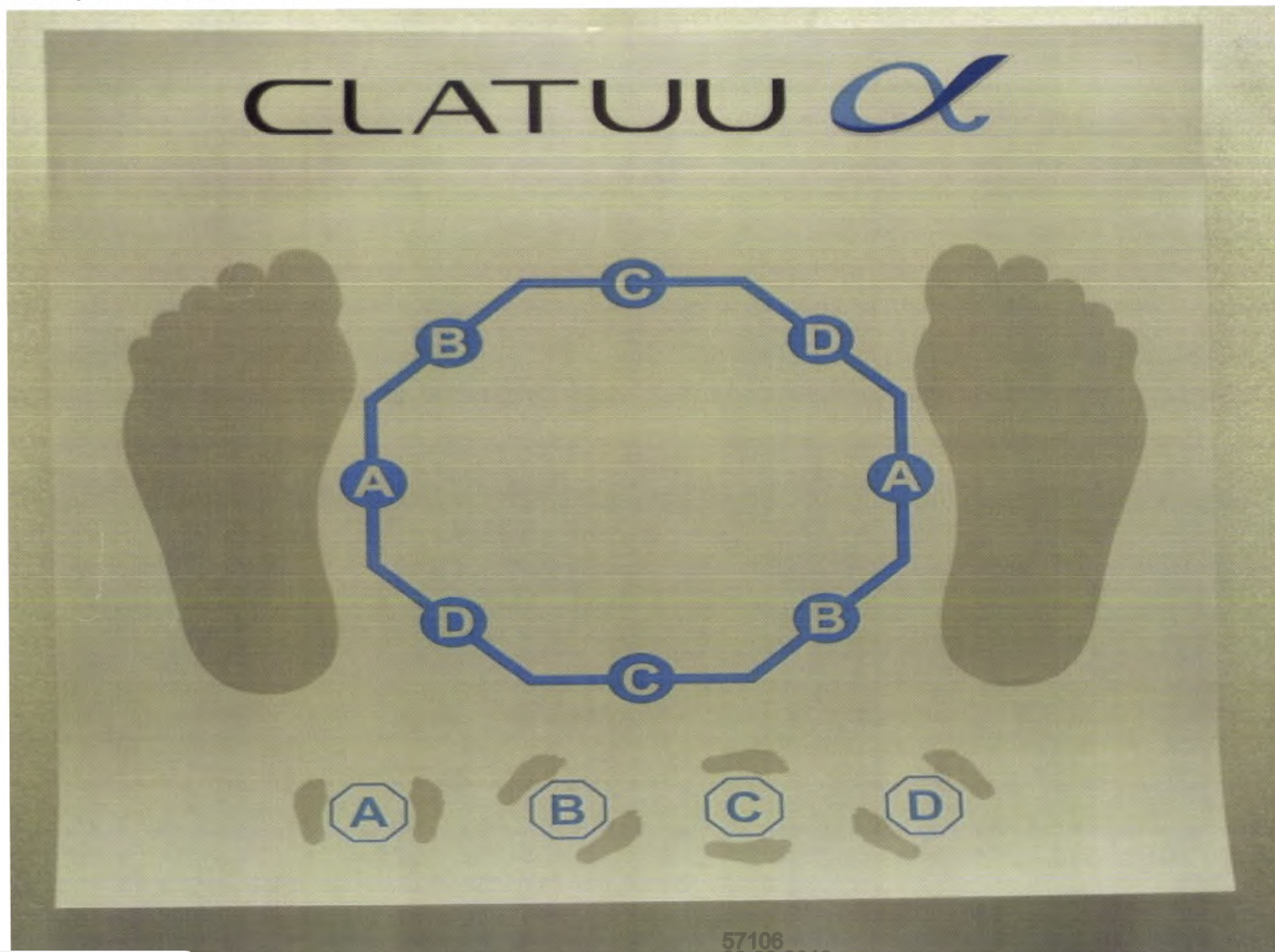

13. Полотенце—1 шт.





В документе про-
нумерованной скреплено
печатью 42 (сорок два)
листов(а)

Генеральный директор
ООО "Белла-С"
Ко Бум Сук

