

КОПИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Оправы корректирующих очков с транспортировочными вставками: пластмассовые,
металлические, комбинированные, полуободковые с принадлежностями.

Производства

Look Occhiali Srl. Italia («Лук Оккьяли» СРЛ, Италия)

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»
“”

ADMINISTRATOR

(должность/position)

ENRICO TORRE

(имя/name)

Enrico Torre

(подпись/signature)

06 JULY 2020

Camera di Commercio
TREVISO-BELLUNO

«день» month (numerals) / «day» month (numerals)

depositata in atti presso questa
Camera di Commercio

М.П. / Stamp

p. il SEGRETARIO GENERALE
(il Funzionario Delegato)

L'Impiegato Addetto
(dott. Andrea Davoli)

CIRIETTI EURO 3.00

look
Occhiali - Lenti - Montature

LOOK OCCHIALI s.r.l. Zona Industriale Villanova, 13
32013 Longorone (TV) - P. IVA 06670360260
Tel. +39 0437 872500 - Fax +39 0437 872570 - info@lookocchiali.it

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Оправы корректирующих очков с транспортировочными вставками: пластмассовые, металлические, комбинированные, полуободковые с принадлежностями, производства фирмы Look Occhiali Srl. Italia («Лук Оккьяли» СРЛ, Италия), предназначены для фиксации линз и правильного расположения линз относительно глаз.

Комплект поставки.


1. Оправы корректирующих очков с транспортировочными вставками металлические; принадлежности: шаблон, салфетка из микрофибры, футляр.
2. Оправы корректирующих очков с транспортировочными вставками пластмассовые; принадлежности: шаблон, салфетка из микрофибры, футляр.
3. Оправы корректирующих очков с транспортировочными вставками комбинированные; принадлежности: шаблон, салфетка из микрофибры, футляр.
4. Оправы корректирующих очков с транспортировочными вставками полуободковые; состав: оправа, нейлоновая леска; принадлежности: шаблон, лента для вставки, салфетка из микрофибры, футляр.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ

Оправы корректирующих очков состоят из рамки, заушников, носовых упоров, шарниров. Шарниры могут быть простыми и пружинными.

Оправы корректирующих очков характеризуют четыре основных геометрических параметра:

- Расстояние между вертикальными касательными к ободку (a)
- Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фацетной канавки ободков (b)
- Длина заушников (L),
- Масса оправы без линз (г),
- Длина заушника до изгиба наконечника (N).

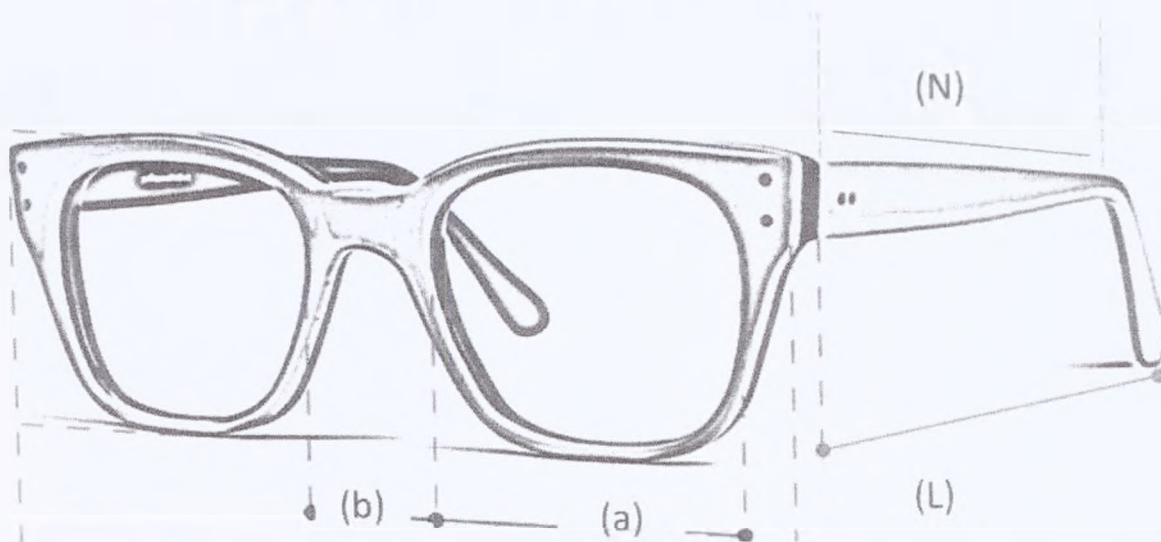

Размеры оправ фирмы «Kering Eyewear Spa» приведены в таблице

Материал	Мужские/Женские	Расстояние между вертикальными касательными к ободку (а, мм)	Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фасетной канавки ободков (b, мм)	Длина заушника (L, мм)	Масса оправы без линз (г)	Длина заушника до изгиба наконечника (N, мм)
Оправы корректирующие их очков металлически	мужские	52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	22 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		45 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		46 ± 0,2 мм	23 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	24 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	150 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	90 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	90 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	90 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	90 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	90 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	90 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	90 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	95 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	100 ± 1,0

		55 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	12 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		58 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		61 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	Женские	45 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		46 ± 0,2 мм	23 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	24 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	150 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	110 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0

[illegible]

[illegible]

		47 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		47 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		48 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		48 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		48 ± 0.2 mm	22 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		48 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	135 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	95 ± 1.0
	Унисекс	48 ± 0.2 mm	24 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 mm	22 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		49 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	150 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	110 ± 1.0
		49 ± 0.2 mm	22 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	22 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	105 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	105 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	105 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	16 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	16 ± 0.2 mm	135 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	95 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
		50 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	105 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	105 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	135 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	95 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	135 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	95 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	15 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	16 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		51 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		52 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		52 ± 0.2 mm	16 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		52 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		52 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		52 ± 0.2 mm	16 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		52 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		52 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0

		57 ± 0.2 мм	15 ± 0.2 мм	145 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		58 ± 0.2 мм	16 ± 0.2 мм	145 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		61 ± 0.2 мм	14 ± 0.2 мм	145 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		52 ± 0.2 мм	14 ± 0.2 мм	90 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	80 ± 1.0
		54 ± 0.2 мм	15 ± 0.2 мм	110 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	70 ± 1.0
		56 ± 0.2 мм	16 ± 0.2 мм	110 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	70 ± 1.0
		57 ± 0.2 мм	17 ± 0.2 мм	110 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	70 ± 1.0
		52 ± 0.2 мм	14 ± 0.2 мм	90 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	80 ± 1.0
		54 ± 0.2 мм	15 ± 0.2 мм	110 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	70 ± 1.0
		56 ± 0.2 мм	16 ± 0.2 мм	110 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	70 ± 1.0
		57 ± 0.2 мм	17 ± 0.2 мм	110 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	70 ± 1.0
	Детские	45 ± 0.2 мм	22 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		46 ± 0.2 мм	23 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	22 ± 1.0	100 ± 1.0
		47 ± 0.2 мм	21 ± 0.2 мм	145 ± 1.0 мм	30.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		47 ± 0.2 мм	21 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	30.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		47 ± 0.2 мм	17 ± 0.2 мм	135 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	95 ± 1.0
		47 ± 0.2 мм	20 ± 0.2 мм	135 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	95 ± 1.0
		47 ± 0.2 мм	20 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		47 ± 0.2 мм	21 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		47 ± 0.2 мм	21 ± 0.2 мм	145 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		48 ± 0.2 мм	19 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		48 ± 0.2 мм	17 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		48 ± 0.2 мм	22 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		48 ± 0.2 мм	17 ± 0.2 мм	135 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	95 ± 1.0
		48 ± 0.2 мм	24 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 мм	20 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 мм	22 ± 0.2 мм	145 ± 1.0 мм	20.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		49 ± 0.2 мм	20 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 мм	19 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 мм	21 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 мм	21 ± 0.2 мм	150 ± 1.0 мм	20.0 ± 1.0	110 ± 1.0
		49 ± 0.2 мм	22 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		49 ± 0.2 мм	18 ± 0.2 мм	145 ± 1.0 мм	20.0 ± 1.0	105 ± 1.0
		52 ± 0.2 мм	14 ± 0.2 мм	90 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	80 ± 1.0
		54 ± 0.2 мм	15 ± 0.2 мм	110 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	70 ± 1.0
		56 ± 0.2 мм	16 ± 0.2 мм	110 ± 1.0 мм	23.0 ± 1.0	70 ± 1.0
Материал	Мужские/Женские	Расстояние между вертикальными касательными к ободку (а, мм)	Минимальное расстояние между вертикальными касательными к	Длина заушника (L, мм)	Масса оправы без линз (г)	Длина заушника до изгиба наконечника (N, мм).
Оправы корригирующих очков пластмассовые	мужские	52 ± 0.2 мм	14 ± 0.2 мм	90 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	80 ± 1.0
		54 ± 0.2 мм	15 ± 0.2 мм	110 ± 1.0 мм	22 ± 1.0	70 ± 1.0
		56 ± 0.2 мм	16 ± 0.2 мм	110 ± 1.0 мм	30.0 ± 1.0	70 ± 1.0
		57 ± 0.2 мм	17 ± 0.2 мм	110 ± 1.0 мм	30.0 ± 1.0	70 ± 1.0
		45 ± 0.2 мм	22 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		46 ± 0.2 мм	23 ± 0.2 мм	140 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
		47 ± 0.2 мм	21 ± 0.2 мм	145 ± 1.0 мм	19.0 ± 1.0	105 ± 1.0

	47 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	47 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	135 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	95 ± 1.0
	47 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	135 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	95 ± 1.0
	47 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	47 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	47 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	19.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	48 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	48 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	48 ± 0.2 mm	22 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	48 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	135 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	95 ± 1.0
	48 ± 0.2 mm	24 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	49 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	49 ± 0.2 mm	22 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	49 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	49 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	49 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	49 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	150 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	110 ± 1.0
	49 ± 0.2 mm	22 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	49 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	105 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	22 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	105 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	105 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	105 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	16 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	16 ± 0.2 mm	135 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	95 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	100 ± 1.0
	50 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	20.4 ± 1.0	105 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	135 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	95 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	135 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	95 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	15 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	21 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	17 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	16 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	19 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	51 ± 0.2 mm	20 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0
	52 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	52 ± 0.2 mm	16 ± 0.2 mm	140 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	100 ± 1.0
	52 ± 0.2 mm	18 ± 0.2 mm	145 ± 1.0 mm	21.0 ± 1.0	105 ± 1.0

[illegible]

		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		58 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		61 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	Женские	45 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		46 ± 0,2 мм	23 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	24 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	150 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	110 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	95 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	100 ± 1,0

[illegible]

		55 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	12 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		58 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		61 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	Унисекс	45 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		46 ± 0,2 мм	23 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	24 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	150 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	110 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0

 **ООО ЦПМИ**  **INFO@CPMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

	53 ± 0,2 mm	15 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	53 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	53 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	53 ± 0,2 mm	19 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	53 ± 0,2 mm	17 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	53 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	18 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	20 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	19 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	17 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	18 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	20 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	13 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	19 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	18 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	17 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	15 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	19 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	17 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	17 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	15 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	12 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
	55 ± 0,2 mm	15 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
	56 ± 0,2 mm	18 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
	56 ± 0,2 mm	20 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
	56 ± 0,2 mm	19 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
	56 ± 0,2 mm	15 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
	56 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	56 ± 0,2 mm	14 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	57 ± 0,2 mm	17 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	57 ± 0,2 mm	17 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	57 ± 0,2 mm	15 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	58 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	61 ± 0,2 mm	14 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	52 ± 0,2 mm	14 ± 0,2 mm	90 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	15 ± 0,2 mm	110 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	56 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	110 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	57 ± 0,2 mm	17 ± 0,2 mm	110 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	52 ± 0,2 mm	14 ± 0,2 mm	90 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
	54 ± 0,2 mm	15 ± 0,2 mm	110 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	56 ± 0,2 mm	16 ± 0,2 mm	110 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	57 ± 0,2 mm	17 ± 0,2 mm	110 ± 1,0 mm	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	45 ± 0,2 mm	22 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	46 ± 0,2 mm	23 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	47 ± 0,2 mm	21 ± 0,2 mm	145 ± 1,0 mm	30,0 ± 1,0	105 ± 1,0
	47 ± 0,2 mm	21 ± 0,2 mm	140 ± 1,0 mm	30,0 ± 1,0	100 ± 1,0
	47 ± 0,2 mm	17 ± 0,2 mm	135 ± 1,0 mm	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0

		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	24 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	150 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	110 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
Материал	Мужские/Женские	Расстояние между вертикальными касательными к ободку (а, мм)	Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фасетной канавки ободков (b, мм)	Длина заушника (L, мм)	Масса оправы без линз (г)	Длина заушника до изгиба наконечника (N, мм).
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	22 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		45 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		46 ± 0,2 мм	23 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	24 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	150 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	110 ± 1,0
Оправы корректирующие их очков комбинированные	мужские					

[illegible]

		53 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		53 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		53 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		53 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		53 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		53 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		53 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	13 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	12 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		58 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		61 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		45 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		46 ± 0,2 мм	23 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
	Женские	47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0

 ООО ЦПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	Унисекс	45 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		46 ± 0,2 мм	23 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	24 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	150 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	110 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	95 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	105 ± 1,0

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

[illegible]

Материал	Мужские/Женские	Расстояние между вертикальными касательными к ободку (а, мм)	Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фасетной канавки ободков (b, мм)	Длина заушника (L, мм)	Масса оправы без линз (г)	Длина заушника до изгиба наконечника (N, мм).
Оправы корригирующих очков полуободковые	Мужские	52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	22 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		45 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		46 ± 0,2 мм	23 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	24 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	150 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	110 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	95 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,4 ± 1,0	105 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		51 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	21,0 ± 1,0	100 ± 1,0

		55± 0,2 мм	18± 0,2 мм	140± 1,0 мм	22,5± 1,0	100± 1,0
		55± 0,2 мм	17± 0,2 мм	140± 1,0 мм	22,5± 1,0	100± 1,0
		55± 0,2 мм	15± 0,2 мм	140± 1,0 мм	22,5± 1,0	100± 1,0
		55± 0,2 мм	19± 0,2 мм	145± 1,0 мм	22,5± 1,0	105± 1,0
		55± 0,2 мм	17± 0,2 мм	145± 1,0 мм	22,5± 1,0	105± 1,0
		55± 0,2 мм	16± 0,2 мм	140± 1,0 мм	22,5± 1,0	100± 1,0
		55± 0,2 мм	17± 0,2 мм	145± 1,0 мм	22,5± 1,0	105± 1,0
		55± 0,2 мм	16± 0,2 мм	145± 1,0 мм	22,5± 1,0	105± 1,0
		55± 0,2 мм	16± 0,2 мм	145± 1,0 мм	22,5± 1,0	105± 1,0
		55± 0,2 мм	15± 0,2 мм	140± 1,0 мм	22,5± 1,0	100± 1,0
		55± 0,2 мм	12± 0,2 мм	140± 1,0 мм	22,5± 1,0	100± 1,0
		55± 0,2 мм	15± 0,2 мм	145± 1,0 мм	22,5± 1,0	105± 1,0
		56± 0,2 мм	18± 0,2 мм	140± 1,0 мм	23,0± 1,0	100± 1,0
		56± 0,2 мм	20± 0,2 мм	140± 1,0 мм	23,0± 1,0	100± 1,0
		56± 0,2 мм	19± 0,2 мм	145± 1,0 мм	23,0± 1,0	105± 1,0
		56± 0,2 мм	15± 0,2 мм	140± 1,0 мм	23,0± 1,0	100± 1,0
		56± 0,2 мм	16± 0,2 мм	140± 1,0 мм	23,0± 1,0	100± 1,0
		56± 0,2 мм	14± 0,2 мм	145± 1,0 мм	23,0± 1,0	105± 1,0
		57± 0,2 мм	17± 0,2 мм	140± 1,0 мм	23,0± 1,0	100± 1,0
		57± 0,2 мм	17± 0,2 мм	145± 1,0 мм	23,0± 1,0	105± 1,0
		57 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		58 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		61 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	Женские	45 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		46 ± 0,2 мм	23 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	24 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	150 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	110 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		50 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0

		53 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		53 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		53 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		53 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		53 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	13 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
	-	55 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	12 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		55 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	105 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22,5 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		58 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		61 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
	Унисекс	45 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		46 ± 0,2 мм	23 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0

		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		58 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		61 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		57 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	70 ± 1,0
		45 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		46 ± 0,2 мм	23 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	22 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	30,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		47 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	17 ± 0,2 мм	135 ± 1,0 мм	19,0 ± 1,0	95 ± 1,0
		48 ± 0,2 мм	24 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	20 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	21 ± 0,2 мм	150 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	110 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	22 ± 0,2 мм	140 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	100 ± 1,0
		49 ± 0,2 мм	18 ± 0,2 мм	145 ± 1,0 мм	20,0 ± 1,0	105 ± 1,0
		52 ± 0,2 мм	14 ± 0,2 мм	90 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	80 ± 1,0
		54 ± 0,2 мм	15 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	110 ± 1,0
		56 ± 0,2 мм	16 ± 0,2 мм	110 ± 1,0 мм	23,0 ± 1,0	110 ± 1,0

На поверхности оправ не допускается наличие острых кромок или заусенцев, видимых невооруженным глазом вмятин, царапин, пузырьков, потеков припоя. Заушники должны поворачиваться на своих осях плавно, без заедания.

Декоративные покрытия не применяются.

Для оправ очковых действуют нормы: ISO EN 12870.

Таблица размеров шаблонов:

Ширина	Высота	Толщина
52,9 ± 0,2 мм	32,4 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
54,9 ± 0,2 мм	33,6 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
55 ± 0,2 мм	33,6 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
57 ± 0,2 мм	34,9 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
53 ± 0,2 мм	34,6 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
55 ± 0,2 мм	35,9 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
52 ± 0,2 мм	33,2 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
54 ± 0,2 мм	35,1 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
48 ± 0,2 мм	39,7 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
50 ± 0,2 мм	40,4 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
52 ± 0,2 мм	42,06 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
52 ± 0,2 мм	47,2 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
51 ± 0,2 мм	43,5 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
52 ± 0,5 мм	32,1 ± 0,5 мм	2,5 ± 0,2 мм
54 ± 0,5 мм	32,7 ± 0,5 мм	2,5 ± 0,2 мм
56 ± 0,5 мм	38,3 ± 0,5 мм	2,5 ± 0,2 мм
52 ± 0,2 мм	34 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
54 ± 0,2 мм	35 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
56 ± 0,2 мм	36 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
57 ± 0,2 мм	37 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
45 ± 0,2 мм	30 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
46 ± 0,2 мм	33 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
47 ± 0,2 мм	31 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
47 ± 0,2 мм	32 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
47 ± 0,2 мм	37 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
47 ± 0,2 мм	30 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
47 ± 0,2 мм	38 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
47 ± 0,2 мм	39 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
47 ± 0,2 мм	40 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
48 ± 0,2 мм	19 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
48 ± 0,2 мм	37 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
48 ± 0,2 мм	32 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
48 ± 0,2 мм	40 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
48 ± 0,2 мм	34 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
49 ± 0,2 мм	40 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
49 ± 0,2 мм	41 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
49 ± 0,2 мм	42 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
49 ± 0,2 мм	39 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
49 ± 0,2 мм	31 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
49 ± 0,2 мм	32 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
49 ± 0,2 мм	33 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
49 ± 0,2 мм	38 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм

50 ± 0,2 mm	37 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	38 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	39 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	40 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	41 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	42 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	43 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	44 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	45 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	46 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	47 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	48 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm	49 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	32 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	33 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	34 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	35 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	36 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	37 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	38 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	39 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	40 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	41 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	42 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	43 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	44 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	45 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	46 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	47 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	48 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm	49 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	34 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	35 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	36 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	37 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	38 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	39 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	40 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	41 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	42 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	43 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	44 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	45 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	46 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm

52 ± 0,2 mm	47 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	48 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm	49 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	36 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	37 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	38 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	39 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	40 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	41 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	42 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	43 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	44 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	45 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	46 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	47 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	48 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm	49 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm	40 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm	41 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm	42 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm	43 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm	44 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm	45 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm	46 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm	47 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm	48 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm	49 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	39 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	40 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	41 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	42 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	43 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	44 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	45 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	46 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	47 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	48 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	49 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm	45 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
56 ± 0,2 mm	44 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
56 ± 0,2 mm	45 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
56 ± 0,2 mm	46 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
56 ± 0,2 mm	47 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm
56 ± 0,2 mm	48 ± 0,2 mm	2,5 ± 0,2 mm

56 ± 0,2 мм	49 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
57 ± 0,2 мм	36 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
57 ± 0,2 мм	37 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
57 ± 0,2 мм	35 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
58 ± 0,2 мм	36 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
61 ± 0,2 мм	44 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
52 ± 0,2 мм	44 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
54 ± 0,2 мм	45 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
56 ± 0,2 мм	46 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм
57 ± 0,2 мм	47 ± 0,2 мм	2,5 ± 0,2 мм

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Оправы корректирующих очков с транспортировочными вставками: пластмассовые, металлические, комбинированные, полуободковые с принадлежностями, производства фирмы Look Occhiali Srl. Italia («Лук Оккьяли» СРЛ, Италия), предназначены для фиксации линз и правильного расположения линз относительно глаз.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Существенными противопоказаниями к применению являются:

- индивидуальная непереносимость коррекции зрения при ношении очков;
- невозможность коррекции зрения при ношении очков.

5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Пластмассовые оправы изготавливаются путем вырезания оправы из цельного блока ацетат целлюлозы марки CA Mazzuchelli. Разнообразие форм и размеров отличает оправы этого типа. На внутренней стороне заушника указывается размер оправы, шифр или наименование модели и цвет.

- Рамка и заушники - Ацетат целлюлозы CA Mazzuchelli;
- Размер заушников – 110±1 мм.;
- Вид покрытия - Лак - Crystal Coat 610.99/ER-INC-BR:

ацетат ди 1-метил-метоксиэтил 24-27%; 2- бутоксиэтанол 12-15%; метилэтилкетон 12-15%; ксилол (смесь изомеров) 9-12%; бутиловый спирт 4-4,5%; растворитель нефтя (нефть), легкий ароматизатор 4-4,5%; диацетоновый спирт 3,5-4%; кумол 1,5-2%; мезитилен 1,5-2%; 1,2,4- триметилбензол 1,5-2%; 2-(2-бутоксиэтокси) этанол 0,4-0,45%; 1,2- ангидрид бензойной кислоты -1,2,4-трикарбоновая 0,3-0,35%;

- Масса оправ. не более 38 г.– 25±1 г.;
- Транспортировочные вставки – акрил Polycryl Clear.

Основным материалом для производства **металлических оправ** является высокоуглеродистая сталь марки X10CrNi18-8. Особое предпочтение отдается высокоуглеродистой стали, которая устойчива к коррозии. Наконечники заушников изготавливаются из ацетата целлюлозы СА марки Mazzuchelli, носоупоры изготавливаются из силикона марки Semi-soft, прозрачный материал Esprit® (модифицированный ПВХ)".

- Рамка и заушники - Высокоуглеродистая сталь марки X10CrNi18-8

(72,9% Fe, 18% Cr, 7,5% Ni, 1% Mn);

- Наконечники заушников - Ацетат целлюлозы СА марки Mazzuchelli.;

- Размер заушников – 110±1 мм.;

- Носоупоры - Структурированный полидиметилсилоксан - (силикон) марки Semi-soft, прозрачный материал Esprit® (модифицированный ПВХ);

- Вид покрытия - Лак - Crystal Coat 610.99/ER-INC-BR:

ацетат ди 1-метил-метоксиэтил 24-27%; 2- бутоксиэтанол 12-15%; метилэтилкетон

12-15%; ксилол (смесь изомеров) 9-12%; бутиловый спирт 4-4,5%; растворитель нафта (нефть), легкий ароматизатор 4-4,5%; диацетоновый спирт 3,5-4%; кумол 1,5-2%; мезитилен

1,5-2%; 1,2,4- триметилбензол 1,5-2%; 2-(2-бутоксиэтокси) этанол 0,4-0,45%;

1,2- ангидрид бензойной кислоты -1,2,4-трикарбоновая 0,3-0,35%;

- масса оправ, не более 38 г.– 18±1 г.;

- Транспортные вставки – акрил Polycryl Clear.

В комбинированных оправках в дизайнерских решениях находят соединения элементы из пластика (ацетат целлюлозы марки СА Mazzuchelli) и металла (высокоуглеродистая сталь марки X10CrNi18-8). Semi-soft, прозрачный материал Esprit® (модифицированный ПВХ).

- Рамка - Высокоуглеродистая сталь марки X10CrNi18-8

(72,9% Fe, 18% Cr, 7,5% Ni, 1% Mn);

- Заушники - Ацетат целлюлозы СА марки Mazzuchelli;

- Размер заушников – 110±1 мм.;

- Носоупоры - Структурированный полидиметилсилоксан (силикон) марки Semi-soft, прозрачный материал Esprit® (модифицированный ПВХ);

- Вид покрытия - Лак - Crystal Coat 610.99/ER-INC-BR:

ацетат ди 1-метил-метоксиэтил 24-27%; 2- бутоксиэтанол 12-15%; метилэтилкетон

12-15%; ксилол (смесь изомеров) 9-12%; бутиловый спирт 4-4,5%; растворитель нафта (нефть), легкий ароматизатор 4-4,5%; диацетоновый спирт 3,5-4%; кумол 1,5-2%; мезитилен

1,5-2%; 1,2,4- триметилбензол 1,5-2%; 2-(2-бутоксиэтокси) этанол 0,4-0,45%;

1,2- ангидрид бензойной кислоты -1,2,4-трикарбоновая 0,3-0,35%;

- Масса оправ, не более 38 г.– 21±1 г.;
- Транспортровочные вставки – акрил Polycryl Clear.

Полуободковые оправы для очков делают из различных материалов: сталь марки X10CrNi18-8, с заушниками из металла (сталь марки X10CrNi18-8) и упорами для носа из силикона (марки Semi-soft, прозрачный материал Esprit® (модифицированный ПВХ).

- Рамка и заушники - Высокоуглеродистая сталь марки X10CrNi18-8 (72,9% Fe, 18% Cr, 7,5% Ni, 1% Mn);
- Наконечники заушников - Ацетат целлюлозы СА марки Mazzuchelli;
- Размер заушников – 110±1 мм.;
- Носоупоры - Структурированный полидиметилсилоксан (силикон) марки Semi-soft, прозрачный материал Esprit® (модифицированный ПВХ);
- нейлоновая леска марки Nylon-66 (длина: 80 мм и диаметр лески: 0,5 мм);
- Вид покрытия - Лак - Crystal Coat 610.99/ER-INC-BR:

ацетат ди 1-метил-метоксиэтил 24-27%; 2- бутоксиэтанол 12-15%; метилэтилкетон 12-15%; ксилол (смесь изомеров) 9-12%; бутиловый спирт 4-4,5%; растворитель нафта (нефть), легкий ароматизатор 4-4,5%; диацетоновый спирт 3,5-4%; кумол 1,5-2%; мезитилен 1,5-2%; 1,2,4- триметилбензол 1,5-2%; 2-(2-бутоксиэтокси) этанол 0,4-0,45%; 1,2- ангидрид бензойной кислоты -1,2,4-трикарбоновая 0,3-0,35%;

- Масса оправ, не более 38 г.– 20±1 г.;
- Транспортровочные вставки – акрил Polycryl Clear.

Футляры из ПВХ NL005-9 Внутренняя поверхность - бархатная бумага Poly Velour, поливинилацетатный клей ПВА WH 5050 D3. Размеры от 15 см x 6 см x 3 см до 18 см x 10 см x 7 см.

Салфетка из микрофибры - Полиэстер марки Microfiber 80%, нейлон марки PolyOne 20%, производства Giorgio Fedon & Figli spa, Италия. Размеры от 10 см x 15см ± 0,1см.

Шаблон - Полимер HIPS марки Edistir SR 550, производства Versalis SpA, Италия.

Материалы соответствуют требованиям биологической безопасности.

6. МАРКИРОВКА:

Маркировка оправ должна наноситься на заушники и включать в себя:

- шифр или наименование модели, размеры а, b, L - с внутренней стороны правого заушника;
- наименование (условное обозначение покрытия) - с внутренней стороны левого заушника.

Оправа должна быть вложена в полиэтиленовую упаковку. Полиэтиленовая упаковка должна быть изготовлена по рабочим чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке.

На полиэтиленовой упаковке каждой оправы или на этикетке, вкладываемой в полиэтиленовую упаковку, должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- надпись "Оправа очковая";
- номинальные значения основных размеров;
- наименование предприятия, надпись "Сделано в ITALY";

Оправы, упакованные в полиэтиленовую упаковку, должны быть плотно уложены в групповые упаковочные коробки, изготовленные по рабочим чертежам предприятия-изготовителя. В групповую упаковочную коробку должны быть уложены оправы одного типа с одинаковыми основными размерами.

На каждую групповую упаковочную коробку должна быть наклеена этикетка, выполненная по рабочим чертежам предприятия-изготовителя, на которой должны быть сделаны надписи в соответствии с 6.3 стандарта и дополнительно указано:

- число оправ;
- дата упаковывания.

Транспортная тара - по согласованию с заказчиком. Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака "Осторожно, хрупкое".

Допускается изменение упаковки, не ухудшающее устойчивости к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании и хранении.

7. УПАКОВКА.

Оправы заказываются и поставляются в розничной упаковке.

Оправа упакована в полиэтиленовую упаковку с замком (тип «Zip Lock»), далее в футляр. В футляр также укладывается салфетка из микрофибры, гарантийный талон, информационный вкладыш на котором указано: товарный знак предприятия-изготовителя; надпись "Оправа очковая"; номинальные значения основных размеров; наименование предприятия, надпись "Сделано в*".

Оправы в футлярах доставляются упакованными в картонных коробках.

Комплектность и транспортная тара по согласованию с заказчиком.

8. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Очковые оправы не должны терять свою исходную форму после установки в них линз. Ободки должны быть симметричны. Сколы, царапины, зазоры между очковыми линзами и ободками рамки оправы, а также другие дефекты сборки очков не допускаются.

Очковые линзы, зафиксированные в оправе, не должны смещаться или выпадать из световых проемов оправы при нормальной эксплуатации очков.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Правила:

- не допускается прикладывать значительных механических усилий к оправам, оправы следует хранить в футляре или иной упаковке, исключающей возможность механического повреждения;
- полный средний срок службы оправы не менее 10 лет.
- условия хранения: в отапливаемых хранилищах при температуре окружающей среды от + 8°C до + 25°C, относительной влажности воздуха 60%.
- во время хранения не допускается воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей) и органических растворителей или их паров.

10. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Оправы корректирующих очков применяются во всех климатических зонах, в любое время суток.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Пользуясь оправками очков, следует соблюдать осторожность при занятиях спортом и иной деятельностью, связанной с резкими движениями головой, наклонами, прыжками и ударами.

12. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Побочных эффектов при использовании медицинского изделия не выявлено.

13. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МИ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ

Водителям, имеющим проблемы со зрением, оправы корригирующих очков обеспечивают возможность управления транспортными средствами и механизмами (при использовании оправ для изготовления очков корригирующих).

14. СТЕРИЛЬНОСТЬ

Нестерильно.

15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ

Оправы корригирующих очков должны ремонтироваться в специальных лабораториях, имеющих лицензию на производство, техническое обслуживание и ремонт.

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок хранения оправ - 10 лет. Полный срок службы оправ - не менее 3 лет при количестве поворотов заушника не более 30000.

УПОЛНОМОЧЕННЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «НЭОСТАЙЛ», Россия, 119121, Москва, Ростовская наб., д.1, кв.40. Тел. 8-499-241-78-94.

17. ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Погрузку, крепление, транспортировку и разгрузку готовой продукции производят в соответствии с действующими правилами для каждого вида транспорта.

Оправы, упакованные в транспортную тару, должны быть устойчивы к воздействию транспортной тряски с максимальным ускорением 30 м/с и частотой от 2 до 3 Гц.

Транспортировка.

Упакованные изделия испытаны в следующих условиях:

- Свободное падение с высоты 53.3 см. и 106.6 см.;
- Транспортировка в стеллаже с нагрузкой 165 кг.;
- Транспортировка в условиях тряски 240 об/мин;
- При температуре от -35 до 50 °С. (при температуре 23 °С влажность может быть до 99.9%, при температуре 50 °С и влажности 22.5%)

Чтобы оправы для корректирующих очков надежно служили длительное время, рекомендуется в процессе их эксплуатации соблюдать определенные правила:

- Снимать оправы двумя руками, чтобы снизить риски поломок оправы.
- После использования, необходимо оправу (очки) убирать в футляр.
- Не следует оставлять оправу (очки) возле источников тепла, которые могут повредить оправу.

Условия хранения.

Оправы при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов. Условия хранения: среднесуточная температура хранения от 8 до 25°C. Среднесуточная влажность не должна превышать 60%.

Во время хранения не допускается воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей) и органических растворителей или их паров.

Срок годности оправ: - 10 лет.

18. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация данных изделий производится в соответствии с действующими нормативами утилизации медицинских отходов и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению, установленными СанПиН 2.1.7.2790-2010 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Упаковка может быть переработана. Чтобы избавиться от упаковки и продукта, строго выполняйте правовые нормы пользовательского сообщества.

19. СЕРТИФИКАЦИЯ

Изготовитель использует внутреннюю систему контроля качества, проходящую ежегодную проверку и сертификацию.

Организация, принимающая претензии от потребителей: Общество с ограниченной ответственностью «НЭОСТАЙЛ», Россия, 119121, Москва, Ростовская наб., д.1, кв.40
Тел. 8-499-241-78-94, e-mail: neostyle-russia@mail.ru.

Перевод с итальянского языка на русский язык

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Оправы корригирующих очков с транспортировочными вставками: пластмассовые, металлические, комбинированные, полуободковые с принадлежностями.

**Производства
«Лук Оккьяли» СРЛ, Италия**

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий

(должность)

Энрико Тормен

(имя)

/подпись/

(подпись)

«06» января 2020 г.

«день» месяц (цифрами)

М.П.

Торговая палата

ТРЕВИЗО-БЕЛЛУНО

Засвидетельствование подлинности подписи

Энрико Тормен,

зарегистрированной в материалах этой

Торговой палаты

Сбор: 3,00 евро

От имени СТАРШЕГО СЕКРЕТАРЯ

(Уполномоченное должностное лицо)

Ответственный сотрудник


(Д-р Андреа Дэвиа)

Печать: Торгово-промышленная, ремесленническая, сельскохозяйственная палата Тревизо-Беллуно

**ООО «ЛУК ОККЬЯЛИ» - Промышленная зона Вилланова, 19
32013, Лонгароне (провинция Беллуно) – Код плательщика НДС 00670300250
Тел. +39.0437.573070 – www.lookocchiali.it**

БЕЛЛУНО, 06.01.2020

Перевод данного текста выполнен переводчиком Фроловой Мариной Михайловной

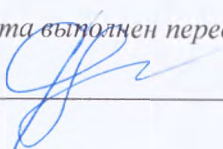

Российская федерация

Город Москва.

Девятого января две тысячи двадцатого года

Я, Бурова Надежда Васильевна, нотариус города Москвы свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Фроловой Мариной Михайловной.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 01-112

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

Нотариус:



Проинуровано, пронумеровано и скреплено печатью 44 лист (-а, -ов).

Нотариус:

