

УТВЕРЖДАЮ
ИП Опришко А.А.



Опришко А.А.

2020 г.

Инструкция по применению

**КОМПЛЕКТ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
ТУ 14.12.30-005-0083970088-2019**

производства ИП Опришко А.А.

2020 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект медицинской одежды многоразового использования по ТУ 14.12.30-005-0083970088-2019, для использования персоналом медицинских учреждений во время приема пациентов и проведения лечебных процедур с целью защиты от прямого контакта с болезнетворными микроорганизмами. (далее по тексту – комплект, комплекты, одежда).

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения - медицинские учреждения, стационары, поликлинические отделения, лаборатории, медицинские транспортные средства, передвижные пункты оказания первой помощи, медицинские кабинеты, медицинские смотровые.

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Одежда показана для повседневного использования персоналом медицинских учреждений с целью защиты от прямого контакта с болезнетворными организмами.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Индивидуальная непереносимость или аллергические реакции на материалы, из которых изготовлена одежда.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Не использовать после истечения срока годности. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Отсутствуют.

Возможные осложнения: не фиксировались.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Для идентификации курток, находящихся в составе каждого комплекта дан цифровой код, цифры кода соответствуют следующему описанию:

а) рукав

1

2 =3/4
3 =длинный

б) фурнитура
1 =пуговицы
2 =кнопки
3 =молния
5 = без фурнитуры

в) воротник
1=английский
2=стойка
3=отложной
4=без воротника

Комплект медицинской одежды многоразового использования по ТУ 14.12.30-005-0083970088-2019, варианты исполнения:

1.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 131, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

2.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 111, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

3.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 133, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

4.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 113, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

5.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 132, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

6.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 112, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

7.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 231 размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

8.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 211, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

9.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 233, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

10.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 213, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

11.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 232, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

12.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 154, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

13.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 114, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

14.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 323, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

15.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 312, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

16.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 311, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

17.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 123, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

18.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 333, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

19.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 313, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

20.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 214, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

21.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 121, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

22.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 212, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

23.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 314, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

24.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 221, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

25.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 321, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

26.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 122, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

27.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 222, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

28.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 322, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

29.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 124, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

30.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 224, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию

31.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 331, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

32.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 324, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

33.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 332, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

34.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 134, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

35.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 234, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

36.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 334, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

37.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 151, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

38.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 251, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

39.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 351, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

40.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 152, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

41.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 252, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

42.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 352, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию

43.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 153, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

44.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 253, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

45.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 353, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

46.Комплект медицинский женский, в составе:

-Куртка женская 254, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70

-Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

47.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 354, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

48.Комплект медицинский женский, в составе:

- Куртка женская 223, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70
- Брюки женские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 или Юбка женская, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

49.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 131, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

50.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 111, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

51.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 133, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

52.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 113, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

53.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 132, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

54.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 112, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

55.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 231 размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72

- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

56.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 211, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

57.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужской 233, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

58.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 213, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

59.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 232, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

60.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 154, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

61.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 114, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

62.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 121, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

63.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 312, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

64.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 323, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

65.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 123, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

66.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 333, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

67.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 311, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

68.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужские 212, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72

- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

69.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 313, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

70.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 214, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

71.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 314, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

72.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 221, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

73.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 321, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

74.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 122, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

75.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 222, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

76.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 322, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

77.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 223, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

78.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 124, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

79.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 224, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

80.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 324, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

81.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 331, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72

- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

82.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 332, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

83.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 134, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

84.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 234, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

85.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 334, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

86.Комплект медицинский мужской, в составе:

-Куртка мужская 151, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72

-Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

87.Комплект медицинский мужской, в составе:

-Куртка мужская 251, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72

-Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

88.Комплект медицинский мужской, в составе:

-Куртка мужская 351, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72

-Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

89.Комплект медицинский мужской, в составе:

-Куртка мужская 152, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72

-Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72

-Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию

-Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию

-Бахилы по требованию

-Инструкция по применению

90.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 252, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

91.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 352, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

92.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 153, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

93.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 253, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

94.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 353, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72

- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

95.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 254, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

96.Комплект медицинский мужской, в составе:

- Куртка мужская 354, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70/72
- Брюки мужские, размеры: 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 /72
- Фартук, размеры (обхват талии): 60-72 / 76-88 / 92-108 / 112-128 по требованию
- Шапочка, размеры: 54 / 56 / 58 / 60 / 62 по требованию
- Бахилы по требованию
- Инструкция по применению

8.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Комплекты предназначены для защиты от загрязнений.

- 1) Основные измерения составляющих готовых комплектов
Таблица 1.

в сантиметрах

Основные измерения готового женского комплекта, в сантиметрах

1- английский воротник, 2-воротник стойка, 3-отложной воротник/без воротника*

Номер измерения	Наименование измерения	Вид воротника*	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека														Допустимое		
				80,0	84,0	88,0	92,0	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	120,0	124,0	128,0	132,0		136,0	140,0
				Обхват бедер типовой фигуры человека																

				86,0	90,0	94,0	98,0	102,0	106,0	110,0	114,0	118,0	122,0	126,0	130,0	134,0	138,0	142,0	146,0	
Куртка женская																				
1	Длина спинки по середине от шва втачивания воротника до низа	1,2,3	143-148,9	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	±1,0
			149-154,9	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	
			155-160,9	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
			161-166,9	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
			167-172,9	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	
			173-178,9	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	
			179-184,9	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	
			185-190,9	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте	1,2,3	143-190,9	35,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	43,0	45,0	45,0	45,5	47,0	48,0	48,5	49,0	50,0	51,0	±0,5
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	1,2,3	143-148,9	74,5	75,5	75,5	76,0	76,5	77,0	78,0	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	86,5	86,5	±1,0
			149-154,9	76,5	77,5	77,5	78,0	78,5	79,0	80,0	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	88,5	88,5	
			155-160,9	78,5	79,5	79,5	80,0	80,5	81,0	82,0	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	90,5	90,5	
			161-166,9	80,5	81,5	81,5	82,0	82,5	83,0	84,0	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	92,5	92,5	
			167-172,9	82,5	83,5	83,5	84,0	84,5	85,0	86,0	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	94,5	94,5	
			173-178,9	84,5	85,5	85,5	86,0	86,5	87,0	88,0	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5	96,5	96,5	
			179-184,9	86,5	87,5	87,5	88,0	88,5	89,0	90,0	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5	98,5	98,5	
			185-190,9	88,5	89,5	89,5	90,0	90,5	91,0	92,0	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5	99,5	100,5	100,5	100,5	

4	Ширина полочки от шва втачивания рукава до борта в самом узком месте	1,2,3	143-190,9	20,5	21,5	22,0	22,5	22,5	23,0	24,0	24,5	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	26,5	27,0	27,0	28,5	
5	Ширина куртки на уровне глубины проймы	1,2,3	143-190,9	48,5	50,5	52,0	54,0	56,5	58,5	61,0	62,5	65,0	66,5	69,0	71,0	72,5	74,5	76,0	78,0	±1,0	
6	Ширина куртки внизу	1,2,3	143-190,9	55,0	56,0	57,5	59,0	61,0	63,0	65,5	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,5	83,5	85,5	±1,0	
7	Длина рукава от высшей точки оката до низа	1	143-148,9	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	±1,0	
			149-154,9	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0		
			155-160,9	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		
			161-166,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0		
			167-172,9	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0		
			173-178,9	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0		
			179-184,9	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0		
			185-190,9	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0		
		2	143-148,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	±1,0	
			149-154,9	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0		
			155-160,9	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0		
			161-166,9	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0		
			167-172,9	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		
			173-178,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
			179-184,9	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0		
			185-190,9	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0		

		3	143-148,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	±0,3
			149-154,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
			155-160,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
			161-166,9	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	
			167-172,9	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	
			173-178,9	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
			179-184,9	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	
			185-190,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
8	Ширина рукава на уровне глубины проймы	1,2,3	143-190,9	17,5	18,0	18,5	18,5	19,5	20,0	20,5	21,5	22,0	23,0	24,0	25,0	25,5	26,0	26,0	26,5	±0,5
9	Ширина рукава внизу	1	143-190,9	13,0	13,5	13,5	14,0	14,5	14,5	15,0	15,5	16,0	16,0	16,5	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0	±0,5
		2	143-190,9	14,0	14,0	14,5	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	16,5	17,0	17,5	17,5	18,0	18,0	18,0	18,5	±0,5
		3	143-190,9	16,5	16,5	17,5	17,5	18,5	19,5	20,0	20,5	20,5	22,0	22,5	23,5	24,0	24,5	24,5	25,0	±0,5
10	Длина воротника по отлету	1	143-190,9	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	41,0	42,0	44,0	45,0	47,0	48,0	50,0	50,0	51,0	53,0	53,0	±0,5
		2	143-190,9	20,0	20,5	20,5	21,0	21,5	22,0	23,0	24,0	24,5	25,5	26,5	27,0	27,0	28,0	28,5	28,5	±0,5
11	Ширина воротника по середине, ширина отделки	1	143-190,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	±0,3
		2	143-190,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	±0,3
		3	143-190,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	±0,3
12	Длина лацкана от угла до первой петли, пуговицы	2	143-190,9	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,5	15,5	16,0	16,0	16,5	16,5	17,0	17,0	17,5	17,5	±0,5
13	Длина кармана по линии рельефа	2	143-190,9	19,0	19,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,5	20,5	20,5	21,0	21,0	21,0	21,5	22,0	22,0	22,0	±0,3

		1,3	143-190,9	22,0	22,0	22,0	22,5	23,0	23,0	22,5	22,5	23,0	24,0	23,5	23,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	±0,3
14	Ширина кармана внизу	1,2,3	143-190,9	15,5	15,5	16,0	16,5	17,5	18,0	19,0	20,0	21,0	20,5	21,0	21,0	21,0	21,5	21,5	22,0	±0,3	
15	Ширина кармана вверху (на уровне нижнего угла входа в карман)	2	143-190,9	13,5	13,5	14,0	15,0	15,5	16,0	17,0	17,5	18,5	18,5	18,5	19,0	19,0	19,5	19,5	19,5	±0,3	
		1,3	143-190,9	14,0	14,0	14,5	15,0	16,0	16,5	18,0	18,5	19,0	18,5	19,0	19,0	19,0	19,5	19,5	19,5	±0,3	
	Ширина хлястика	1,2,3	143-190,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	±0,3	
	Длина хлястика от бокового шва до конца	1,2,3	143-190,9	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	±0,5	

Брюки женские 1- на кулиске, 2 – на поясе*

1	Длина по боковому шву от верхнего края до низа	1*	143-148,9	92,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	94,0	94,0	94,0	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	±1,0
			149-154,9	96,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	
			155-160,9	100,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	102,0	102,0	102,0	102,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	
			161-166,9	104,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	106,0	106,0	106,0	106,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	
			167-172,9	108,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	110,0	110,0	110,0	110,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	
			173-178,9	112,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	114,0	114,0	114,0	114,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	
			179-184,9	116,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	118,0	118,0	118,0	118,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	
			185-190,9	120,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	122,0	122,0	122,0	122,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	
		2*	143-148,9	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	±1,0
			149-154,9	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	
			155-160,9	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
			161-166,9	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
			167-172,9	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	

			173-178,9	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0		
			179-184,9	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0		
			185-190,9	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0		
2	Длина по шаговому шву	1	143-148,9	69,0	67,5	67,5	67,0	66,5	65,0	65,0	64,5	64,0	63,0	62,0	61,5	61,0	60,0	59,0	58,5	±1,0	
			149-154,9	73,0	71,5	71,5	71,0	70,5	69,0	69,0	68,5	68,0	67,0	66,0	65,5	65,0	64,0	63,0	62,5		
			155-160,9	77,0	75,5	75,5	75,0	74,5	73,0	73,0	72,5	72,0	71,0	70,0	69,5	69,0	68,0	67,0	66,5		
			161-166,9	81,0	79,5	79,5	79,0	78,5	77,0	77,0	76,5	76,0	75,0	74,0	73,5	73,0	72,0	71,0	70,5		
			167-172,9	85,0	83,5	83,5	83,0	82,5	81,0	81,0	80,5	80,0	79,0	78,0	77,5	77,0	76,0	75,0	74,5		
			173-178,9	89,0	87,5	87,5	87,0	86,5	85,0	85,0	84,5	84,0	83,0	82,0	81,5	81,0	80,0	79,0	78,5		
			179-184,9	93,0	91,5	91,5	91,0	90,5	89,0	89,0	88,5	88,0	87,0	86,0	85,5	85,0	84,0	83,0	82,5		
			185-190,9	97,0	95,5	95,5	95,0	94,5	93,0	93,0	92,5	92,0	91,0	90,0	89,5	89,0	88,0	87,0	86,5		
		2	143-148,9	67,0	67,0	67,0	66,5	66,0	65,5	65,0	64,0	63,0	63,0	62,5	62,0	61,5	61,0	60,5	60,0	±1,0	
			149-154,9	71,0	71,0	71,0	70,5	70,0	69,5	69,0	68,0	67,0	67,0	66,5	66,0	65,5	65,0	64,5	64,0		
			155-160,9	75,0	75,0	75,0	74,5	74,0	73,5	73,0	72,0	71,0	71,0	70,5	70,0	69,5	69,0	68,5	68,0		
			161-166,9	79,0	79,0	79,0	78,5	78,0	77,5	77,0	76,0	75,0	75,0	74,5	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0		
			167-172,9	83,0	83,0	83,0	82,5	82,0	81,5	81,0	80,0	79,0	79,0	78,5	78,0	77,5	77,0	76,5	76,0		
			173-178,9	87,0	87,0	87,0	86,5	86,0	85,5	85,0	84,0	83,0	83,0	82,5	82,0	81,5	81,0	80,5	80,0		
			179-184,9	91,0	91,0	91,0	90,5	90,0	89,5	89,0	88,0	87,0	87,0	86,5	86,0	85,5	85,0	84,5	84,0		
			185-190,9	95,0	95,0	95,0	94,5	94,0	93,5	93,0	92,0	91,0	91,0	90,5	90,0	89,5	89,0	88,5	88,0		
3	Ширина на уровне среднего шва	1	143-190,9	47,5	49,0	50,5	52,0	54,0	55,5	58,0	60,0	62,5	64,0	66,5	68,5	70,0	71,5	73,5	75,5	±1,0	

		2	143-190,9	45,5	47,5	49,5	51,5	54,0	55,5	57,5	60,0	62,0	63,5	66,0	68,0	70,0	71,5	73,5	75,0	±1,0
4	Ширина брюк по линии талии при растянутой эластичной ленте	1	143-190,9	43,5	45,0	47,0	49,5	51,5	54,0	56,5	58,5	61,5	63,0	64,5	67,0	68,5	70,0	72,0	73,5	±1,0
		2	143-190,9	43,50	45,50	47,50	49,50	51,50	53,50	55,50	57,50	59,50	61,50	63,50	65,50	67,50	69,50	71,50	73,50	±1,0
5	Ширина внизу	1	143-190,9	19,5	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,0	22,5	23,0	24,0	24,0	24,5	26,0	25,0	25,5	±0,5
		2	143-190,9	18,5	19,0	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	24,5	25,0	25,9	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	±0,5

Юбка

1	Длина юбки		143-148,9	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	-	-	-	-	-	±1,0
			149-154,9	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	-	-	-	-	-	
			155-160,9	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	-	-	-	-	-	
			161-166,9	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	-	-	-	-	-	
			167-172,9	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	-	-	-	-	-	
			173-178,9	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	-	-	-	-	-	
			179-184,9	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	-	-	-	-	-	
			185-190,9	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	-	-	-	-	-	
2	Ширина юбки и талии		143-190,9	30,00	32,00	34,50	36,50	38,50	40,50	42,50	45,00	47,50	50,00	52,50	-	-	-	-	-	±1,0
3	Ширина юбки внизу		143-190,9	41,50	43,50	45,50	48,00	50,00	52,00	54,00	56,50	58,50	60,50	62,50	-	-	-	-	-	±1,0

2) Основные измерения готового мужского комплекта

в сантиметрах

Таблица 2

Основные измерения готового мужского комплекта в сантиметрах

1-английский воротник, 2- воротник стойка, 3- отложной воротник*

Номер измерения	Наименование измерения	Вид Воротника*	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека															Допустимое отклонение
				88,0	92,0	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	120,0	124,0	128,0	132,0	136,0	140,0	144,0	
				Обхват бедер типовой фигуры человека															
				92,0	95,0	98,0	101,0	104,0	107,0	110,0	113,0	116,0	119,0	122,0	125,0	128,0	131,0	134,0	
Куртка мужская																			
1	Длина спинки по середине от шва втачивания воротника до низа	1,2,3	155-160,9	73,5	74,0	74,0	74,0	74,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,5	76,5	76,5	±1,0
			161-166,9	75,5	76,0	76,0	76,0	76,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,5	78,5	78,5	
			167-172,9	77,5	78,0	78,0	78,0	78,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,5	80,5	80,5	
			173-178,9	79,5	80,0	80,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,5	82,5	82,5	
			179-184,9	81,5	82,0	82,0	82,0	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,5	84,5	84,5	
			185-190,9	83,5	84,0	84,0	84,0	84,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,5	86,5	86,5	
			191-196,9	85,5	86,0	86,0	86,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,5	88,5	88,5	
			197-202,9	87,5	88,0	88,0	88,0	88,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,5	90,5	90,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте	1,2,3	155-202,9	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	49,5	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	±0,5
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	1,2,3	155-160,9	75,0	75,5	75,5	75,5	76,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,5	78,5	79,0	79,0	79,5	80,0	±1,0
			161-166,9	77,0	77,5	77,5	77,5	78,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,5	80,5	81,0	81,0	81,5	82,0	
			167-172,9	79,0	79,5	79,5	79,5	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,5	82,5	83,0	83,0	83,5	84,0	

			173-178,9	81,0	81,5	81,5	81,5	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,5	84,5	85,0	85,0	85,5	86,0	
			179-184,9	83,0	83,5	83,5	83,5	84,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,5	86,5	87,0	87,0	87,5	88,0	
			185-190,9	85,0	85,5	85,5	85,5	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,5	88,5	89,0	89,0	89,5	90,0	
			191-196,9	87,0	87,5	87,5	87,5	88,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,5	90,5	91,0	91,0	91,5	92,0	
			197-202,9	89,0	89,5	89,5	89,5	90,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,5	92,5	93,0	93,0	93,5	94,0	
4	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	1,2	155-202,9	24,0	24,5	25,0	25,5	25,7	26,0	26,5	27,0	27,5	27,7	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	±0,5
		3	155-202,9	22,0	22,5	23,0	23,5	23,7	24,0	24,5	25,0	25,5	25,7	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	±0,5
5	Ширина куртки на уровне глубины проймы	1,2	155-202,9	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	±1,0
		3	155-202,9	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	±1,0
6	Ширина куртки внизу	1,2	155-202,9	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	±1,0
		3	155-202,9	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	±1,0
7	Длина рукава	1,2,3 кор	155-160,9	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	±1,0
			161-166,9	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	
			167-172,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
			173-178,9	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	
			179-184,9	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	
			185-190,9	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	
			191-196,9	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	
			197-202,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
		1,2,3 дл	155-160,9	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	±1,0

			161-166,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0		
			167-172,9	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0		
			173-178,9	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0		
			179-184,9	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0		
			185-190,9	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0		
			191-196,9	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0		
			197-202,9	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0		
8	Ширина рукава на уровне глубины проймы	1,2,3	155-202,9	19,5	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	27,0	28,0	28,5	29,0	±0,5	
9	Ширина рукава внизу	1,2,3 кор	155-202,9	18,0	19,0	19,5	19,5	21,0	21,5	22,0	23,0	23,0	23,5	24,0	25,0	26,0	26,5	27,0	±0,5	
		1,2,3 дл	155-202,9	14,0	14,0	14,5	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5	15,5	16,0	16,0	16,5	17,0	17,5	17,5	±0,5	
10	Длина воротника по отлету	1	155-202,9	42,0	43,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	45,0	45,0	48,0	50,0	51,0	52,0	±0,5	
		2	155-202,9	44,0	45,0	45,5	45,5	46,0	46,0	46,0	47,0	47,0	48,0	49,0	51,0	52,0	53,0	54,0	±0,5	
		3	155-202,9	50,0	50,0	50,5	50,5	51,5	51,5	51,5	52,0	52,0	53,0	54,0	55,5	56,5	58,0	60,0	±0,5	
11	Ширина воротника по середине	1	155-202,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,3	
		2	155-202,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	±0,3	
		3	155-202,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	±0,3	
12	Длина лацкана от угла до первой петли, пуговицы	1	155-202,9	14,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0	±0,5	
13	Ширина бокового кармана	1,2,3	155-202,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	±0,3	
14	Длина бокового кармана	1,2,3	155-202,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	±0,3	

15	Ширина нагрудного кармана	1,2,3	155-202,9	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
16	Длина нагрудного кармана	1,2,3	155-202,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	±0,3
17	Длина хлястика от бокового шва до конца	2	155-202,9	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,0	40,0	41,0	42,0	±0,5
18	Ширина хлястика	2	155-202,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,3
19	Длина застежки-молнии	3	155-160,9	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	±0,5
			161-166,9	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
			167-172,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
			173-178,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
			179-184,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
			185-190,9	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
			191-196,9	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
			197-202,9	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	

Брюки мужские 1-на кулиске, 2-на поясе*

1	Длина по боковому шву от верхнего края до низа	1*	155-160,9	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	±1,0
			161-166,9	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
			167-172,9	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	
			173-178,9	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
			179-184,9	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	
			185-190,9	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	
			191-196,9	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	

			197-202,9	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	
		2*	155-160,9	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	±1,0
			161-166,9	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	
			167-172,9	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	
			173-178,9	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	
			179-184,9	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	
			185-190,9	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	
			191-196,9	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	
			197-202,9	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5	
2	Длина по шаговому шву	1	155-160,9	70,5	69,5	69,5	69	68,5	68	67,5	67	66,5	66	65,5	65	64,5	64,5	±1,0
			161-166,9	74,5	73,5	73,5	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68,5	
			167-172,9	78,5	77,5	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72,5	
			173-178,9	82,5	81,5	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76,5	
			179-184,9	86,5	85,5	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80,5	
			185-190,9	90,5	89,5	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84,5	
			191-196,9	94,5	93,5	93,5	93	92,5	92	91,5	91	90,5	90	89,5	89	88,5	88,5	
			197-202,9	98,5	97,5	97,5	97	96,5	96	95,5	95	94,5	94	93,5	93	92,5	92,5	
		2	155-160,9	70,0	69,0	68,5	68,0	68,0	67,0	67,0	66,0	65,5	65,0	64,5	64,0	64,0	63,5	±1,0
			161-166,9	74,0	73,0	72,5	72,0	72,0	71,0	71,0	70,0	69,5	69,0	68,5	68,0	68,0	67,5	

			167-172,9	78,0	77,0	76,5	76,0	76,0	75,0	75,0	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0	71,5	71,0	70,5	
			173-178,9	82,0	81,0	80,5	80,0	80,0	79,0	79,0	78,0	77,5	77,0	76,5	76,0	76,0	75,5	75,5	
			179-184,9	86,0	85,0	84,5	84,0	84,0	83,0	83,0	82,0	81,5	81,0	80,5	80,0	80,0	79,5	79,5	
			185-190,9	90,0	89,0	88,5	88,0	88,0	87,0	87,0	86,0	85,5	85,0	84,5	84,0	84,0	83,5	83,5	
			191-196,9	94,0	93,0	92,5	92,0	92,0	91,0	91,0	90,0	89,5	89,0	88,5	88,0	88,0	87,5	87,5	
			197-202,9	98,0	97,0	96,5	96,0	96,0	95,0	95,0	94,0	93,5	93,0	92,5	92,0	92,0	91,5	91,5	
3	Ширина на уровне среднего шва	1	155-202,9	50,0	51,5	53,0	54,5	56,0	57,5	59,0	60,5	62,0	64,0	64,5	67,0	69,0	70,4	72,0	±1,0
		2	155-202,9	50,5	52,0	53,5	55,5	56,5	57,5	59,5	61,0	63,0	64,5	66,0	67,5	69,0	71,0	72,5	±1,0
4	Ширина брюк по линии талии при растянутой эластичной ленте	1	155-202,9	47,0	46,5	49,0	51,0	52,5	54,5	57,0	59,5	61,5	63,5	65,5	67,0	69,0	71,0	73,0	±1,0
		2	155-202,9	47,0	47,5	49,5	51,5	54,0	55,0	56,5	60,5	62,0	64,0	66,5	68,0	69,5	72,0	73,5	±1,0
5	Ширина внизу	1	155-202,9	22,5	23,0	23,5	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	31,0	±0,5
		2	155-202,9	22,5	23,0	23,5	24,0	25,0	25,5	26,0	26,5	27,5	28,0	28,5	29,0	29,7	30,0	31,0	±0,5

- Шапочка медицинская;

Шапочка универсальная мужская и женская предназначен для защиты волос от загрязнений и защиты окружающей среды от волос и мелких частиц с головы. Шапочка состоит из бортика, донышка.

Таблица 3.

Измерение обхвата типовой фигуры относительно размера шапочки		
Измерение обхвата типовой фигуры	Интервал обхвата головы человека	Размер
53,0-54,0	от 52,5 до 54,5 включительно	54
55,0-56,0	свыше 54,5 до 56,5 включительно	56
57,0-58,0	свыше 56,5 до 58,5 включительно	58
59,0-60,0	свыше 58,5 до 60,5 включительно	60
61,0-62,0	свыше 60,5 до 62,5 включительно	62

Таблица 4.

Основные измерения готовой шапочки, в сантиметрах

Номер измерения	Наименование измерения	Размер					Допустимое отклонение
		54	56	58	60	62	
		Значение измерения					

Шапочка тип А

1	Длина внутренней окружности	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	±0,5
2	Высота стенки	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	±0,5
3	Диаметр доньшка	17,4	18,0	18,7	19,3	19,9	±0,3
4	Длина завязки	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	±0,3
5	Ширина задней детали стенки	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	±0,3

Фартук изготавливается прямоугольной формы с шейными завязками по линии талии. Завязки пришивают по линии талии фартука длиной не менее 60,0 см с каждой стороны. Низ фартука обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом или окантовывают.

Таблица 5.

Основные измерения готового фартука, в сантиметрах

Номер измерения	Наименование измерения	Рост типовой фигуры человека, см	Обхват талии типовой фигуры человека, см				Допустимое отклонение
			58-73,9	74-90,4	90,5-110,4	110,5-130,4	
Фартук							
1	Длина фартука посередине от верхнего края до низа	143-154,9	74,0	76,0	78,0	80,0	±1,0
		155-166,9	78,0	80,0	82,0	84,0	
		167-178,9	82,0	84,0	86,0	88,0	
		179-190,9	86,0	88,0	90,0	92,0	

2	Длина нагрудника посередине от верхнего края до линии талии (на уровне пришитых боковых завязок)	143-190,9	22,0	24,0	26,0	28,0	±0,5
3	Ширина нагрудника в верхней части фартука	143-190,9	22,0	23,0	24,0	25,0	±1,0
4	Ширина фартука на уровне боковых углов	143-190,9	55,0	67,0	79,0	91,0	±1,0
5	Ширина фартука внизу	143-190,9	55,0	61,0	67,0	73,0	±1,0
6	Длина шейных завязок	143-190,9	45,0	45,0	50,0	50,0	±1,0
7	Длина боковых завязок	143-190,9	65,0	65,0	70,0	70,0	±1,0
8	Длина бокового кармана	143-190,9	19,0	20,0	21,0	22,0	±0,5
9	Ширина бокового кармана	143-190,9	18,0	19,0	20,0	21,0	±0,5

Таблица 6.

Бахилы, предназначены для защиты от загрязнений, состоят из подошвы и голенища, с завязками по верхнему краю голенища.

Основные измерения готовых бахил, в сантиметрах

Номер измерения	Наименование измерения	Данные	Допустимое отклонение
Бахилы			
1	Длина подошвы	32,5	±1,0
2	Ширина подошвы	12,0	±0,5
3	Высота голенища	39,0	±1,0
4	Ширина голенища вверху	26,0	±1,0
5	Длина завязки	39,0	±1,0

Размерная таблица (женщины)

Размер	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Обхват груди, см	80,0	84,0	88,0	92,0	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	120,0	124,0	128,0	132,0	136,0	140,0
Обхват бедер, см	86,0	90,0	94,0	98,0	102,0	106,0	110,0	114,0	118,0	122,0	126,0	130,0	134,0	138,0	142,0	146,0

Размерная таблица (мужчины)

Размер	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Обхват груди, см	88,0	92,0	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	120,0	124,0	128,0	132,0	136,0	140,0	144,0
Обхват бедер, см	92,0	95,0	98,0	101,0	104,0	107,0	110,0	113,0	116,0	119,0	122,0	125,0	128,0	131,0	134,0

Диаметр кнопок 1 см $\pm 0,1$ см

Диаметр пуговиц 1,7 см $\pm 0,3$ см

Масса брюк женских 185 г ± 50 г

Масса юбки 115 г ± 50 г

Масса куртки женской 220 г ± 50 г

Масса брюк мужских 190 г ± 50 г

Масса куртки мужской 240 г ± 50 г

Масса шапочки 25 г ± 5 г

Масса фартука 88 г ± 7 г

Масса бахил 125 г. ± 5 г

Изделия не должны иметь необрезанных ниток, необработанных швов и краев изделия, посторонних включений на поверхности изделия.

Изменение размеров (усадка) изделий после мокрых обработок не должно превышать 5 %, для изделие изготовленных из 100% хлопка допускается усадка не более 10%.

Поверхностная плотность указана в разделе «Требования к материалам и сырью».

Разрывная нагрузка указана в разделе «Требования к материалам и сырью».

Разрывная нагрузка швов изделий должна быть, не менее 560 Н.

Воздухопроницаемость материалов изделий должна быть, не менее 60 дм³/м²×с.

Гигроскопичность изделий должна быть, не менее 2%.

Удельное электрическое сопротивление изделий должно быть, не более 10¹⁴ Ом.

Стойкость к истиранию изделий должна быть, не менее 3000 циклов.

Изделие при эксплуатации должно быть устойчиво к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 15150 для исполнения УХЛ категории 4.2.

Номинальное значение температуры окружающей среды: от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность при температуре 25 °С – до 75%.

Изделия при транспортировке соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие при транспортировании должно быть устойчиво к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 15150 для условий хранения 5.

Изделие при хранении должно быть устойчиво к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 15150 для условий хранения 1.

Материалы, применяемые при изготовлении изделия должны обеспечивать требования биологической безопасности в соответствии со стандартами серии ГОСТ ISO 10993 и ГОСТ Р ИСО 10993-2.

Срок годности одежды, при соблюдении условий эксплуатации – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты производства.

Требования к материалам и сырью

Используемые материалы:

Куртки, брюки, юбки, халат, шапочки, бахилы должны быть изготовлены из материалов:

1) ткань смесовая 35-60% хлопок, 40-65% пэ, пл.115-145гр, без марки

Прочность на разрыв, Н:

-по основе 651

-по утку 476

2) ткань смесовая 35-60% хлопок, 40-65% пэ, пл.145-180гр, без марки

Прочность на разрыв, Н:

-по основе 885

-по утку 575

3) ткань смесовая 35-60% вискоза, 40-65% пэ, пл.130-160гр, без марки

Прочность на разрыв, Н:

-по основе 750

-по утку 400

5) ткань хлопчатобумажная - 100% хлопок, пл.112-142гр, без марки

Прочность на разрыв, Н:

-по основе 390

-по утку 340

Производства ИП Опришко А.А.

Фурнитура (кнопки, молнии, пуговицы) могут изготавливаться из стали марки AISI304 или ABS марки TERLUX2802TR.

Фартук изготавливается из Клеенки подкладной с поливинилхлоридным покрытием «Виталфарм» ТУ 9464-012-50887801-2008, производства ЗАО «Виталфарм» (материалы: плотно термоскрепленное: ткань техническая полиэфирная марки ПК-28, бязь набивная 100 хлопок, без марки, ситец набивной 100 хлопок, поливинилхлорид марки ПВХ-С-6358 М) (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03468 от 18.04.2013).

По гигиеническим показателям ткани, применяемые при изготовлении изделий, должны соответствовать гигиеническим нормативам (СанПиН, МДУ, ПДК и др.), представленным в таблице 9.

Таблица 9.

Наименование показателя	Значение, не более
Интенсивность запаха, балл	2,0
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	15,0
Формальдегид, мкг/г (в водную среду)	300
Диметилтерефталат, мг/дм ³ (в водную среду)	1,5
Ацетальдегид, мг/дм ³ (в водную среду)	0,2
Формальдегид, мг/м ³ (в воздушную среду)	0,003
Ацетальдегид, мг/м ³ (в воздушную среду)	0,01
Диметилтерефталат, мг/м ³ (в воздушную среду)	0,01
Индекс токсичности, %	70-120

Одежда может выпускаться цветов: белый, красный, голубой, зеленый, синий, черный, желтый. Для окрашивания изделий используется красители: краситель активный красный 6СБ производства ООО «ХимТехник», краситель активный голубой 3Б производства ООО

«ХимТехник», краситель синий Rifalon Blue S-BBLS 200% производства Indarten, краситель активный глубоко-черный СБ производства ООО «ХимТехник», Белый оптический отбеливатель UNITEX EMS производства Siba (Швейцария), краситель активный зеленый СБ производства ООО «ХимТехник», краситель желтый марки Yellow 3R производства Dustar.

9. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Проверьте качество упаковки, а также отсутствие механических и иных повреждений. Вскройте упаковку.
2. Достаньте изделие из упаковки. Убедитесь визуальным осмотром в отсутствии дефектов, влияющих на пригодность изделия к применению.
3. Одевайте изделия своего размера.

10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Одежда, поставляемая потребителю, не токсична, не содержит веществ, представляющих опасность для окружающей среды и здоровья человека.

Одежда не оказывает сенсibiliзирующего или раздражающего действия.

В состав одежды не входят компоненты и вещества, требующие при производстве особо строгого соблюдения требований производственной и пожарной безопасности.

При изготовлении одежды должны соблюдаться требования пожарной безопасности.

Производственные помещения должны быть оборудованы всеми необходимыми средствами пожаротушения.

Требования к охране окружающей среды

Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почвы и воды в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.


Отходы производства должны подвергаться утилизации.

Допускается утилизацию отходов материалов и химикатов в процессе производства производить на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ.


Эксплуатация одежды должна осуществляться в соответствии с указаниями, изложенными в инструкции по применению. Одежда является изделием для многоразового использования.

11.1. Конструкция изделия.

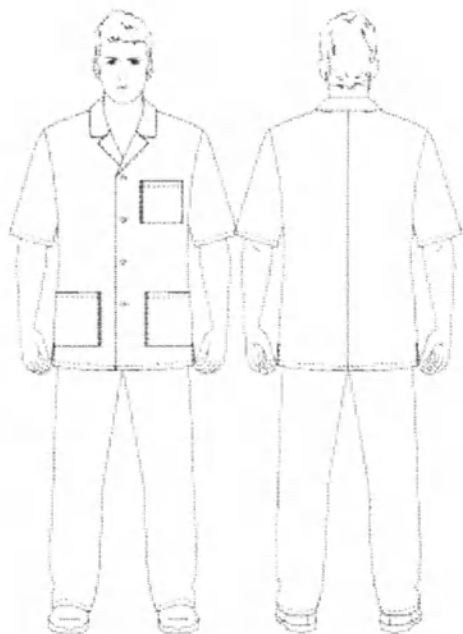


Куртка мужская

Английский воротник:

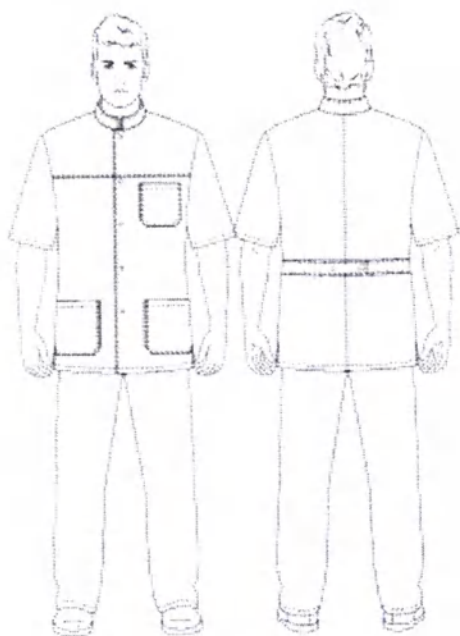



Куртка мужская

Воротник стойка

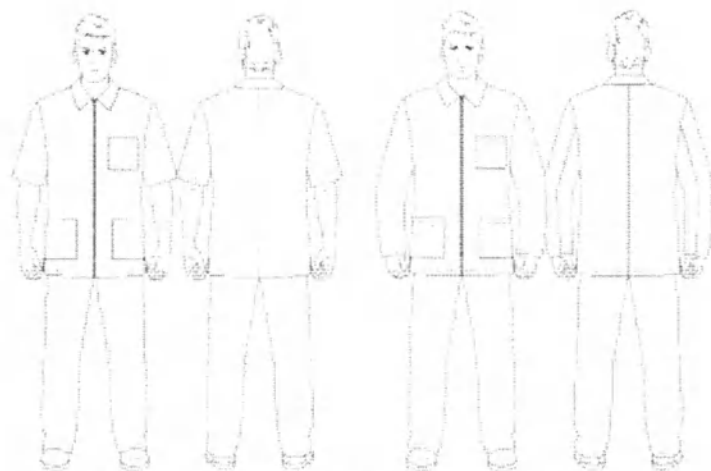


Куртка мужская – отложной воротник

Отложной воротник

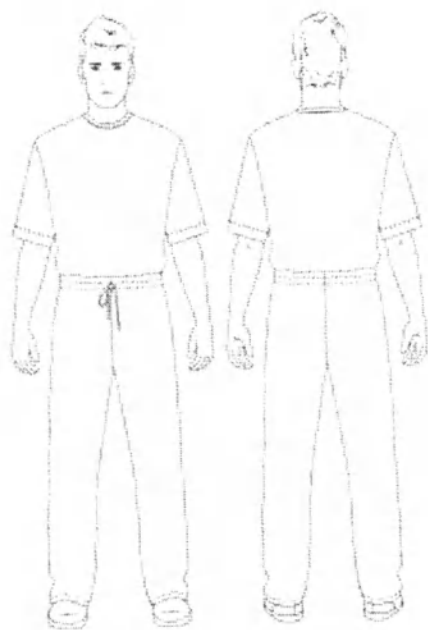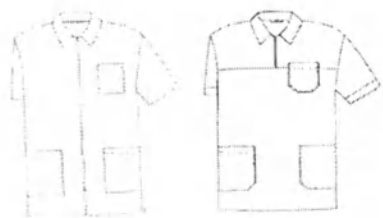

Брюки мужские

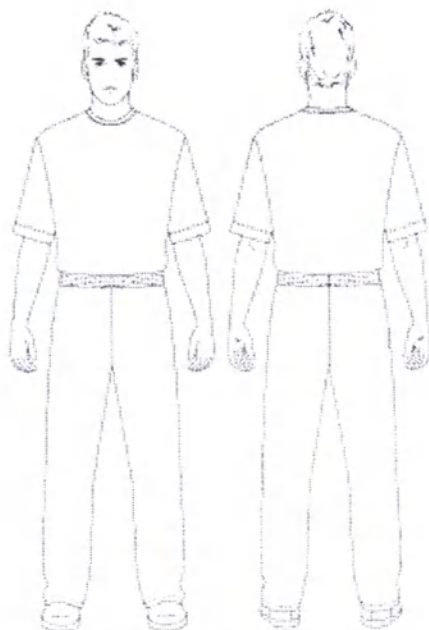

Брюки мужские



Куртка женская


Воротник стойка:





Куртка женская


Английский воротник:

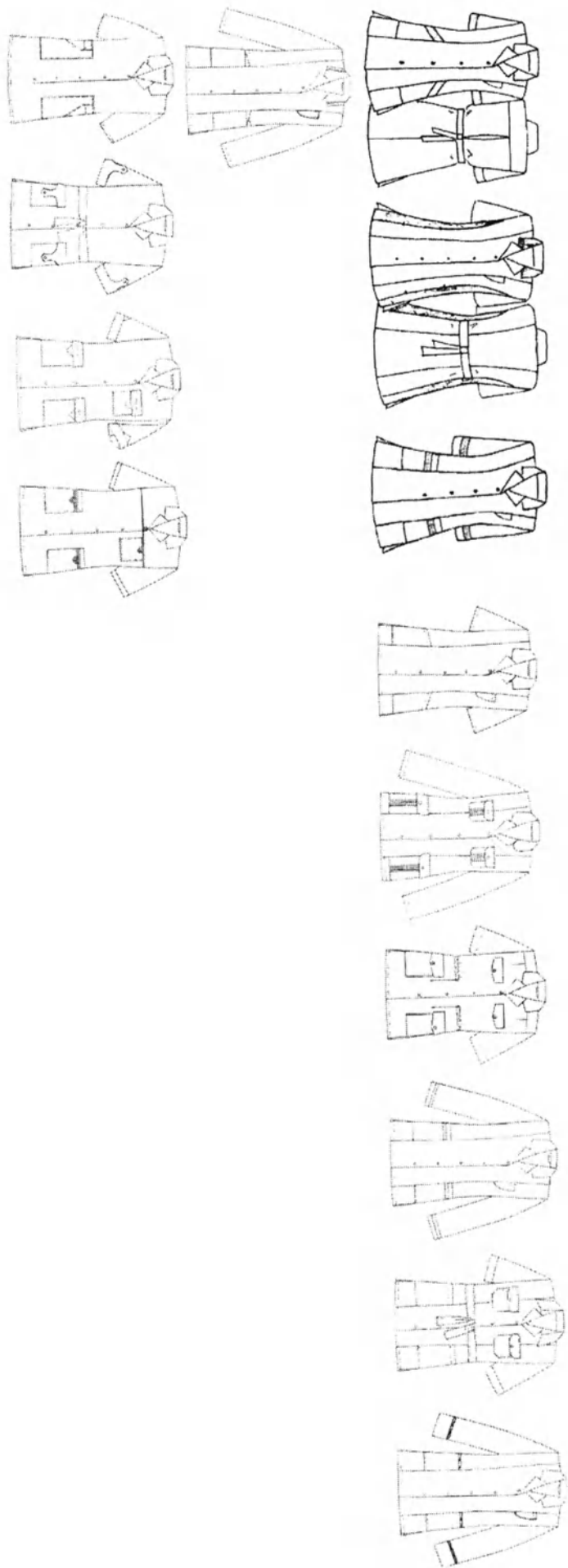





Куртка женская

Без воротника:

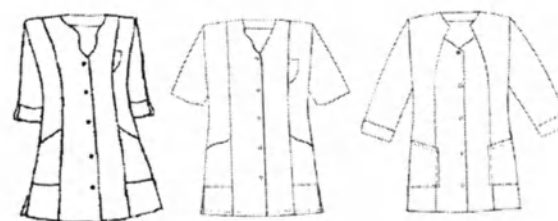


Отложной воротник:

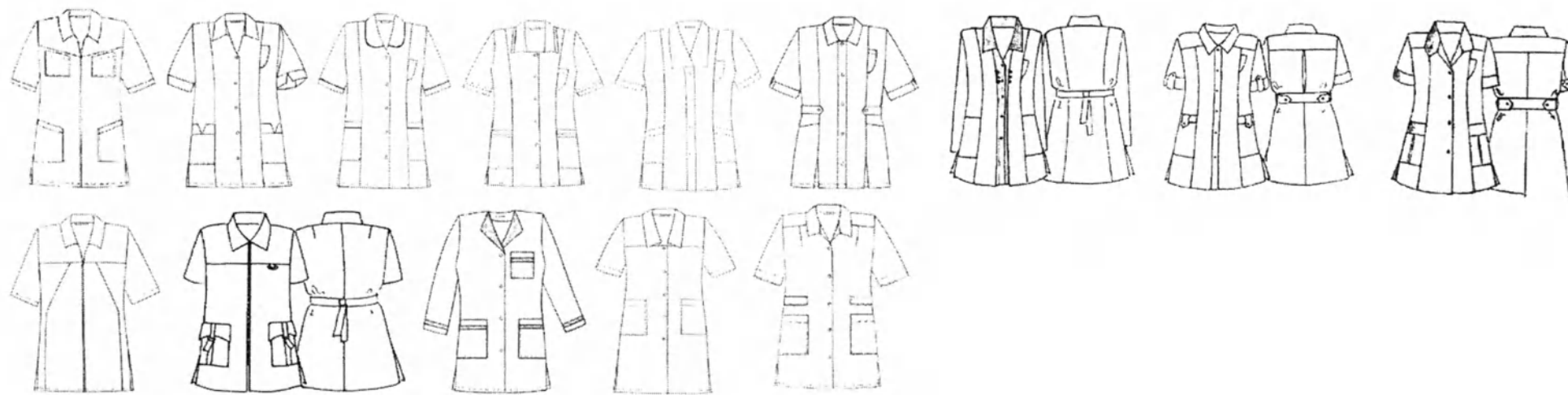

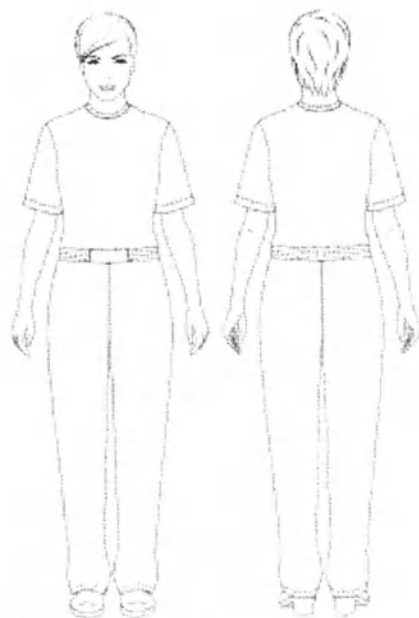


Брюки женские

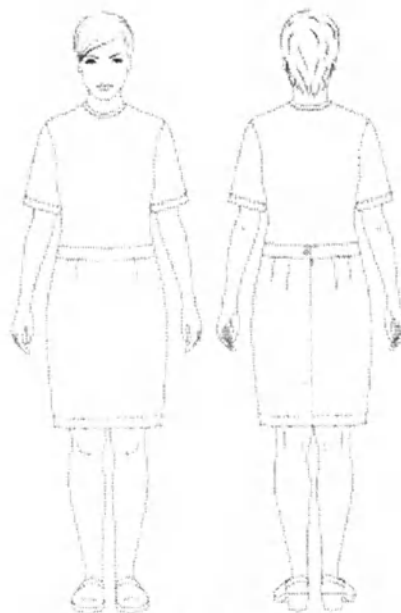


Юбка женская



Фартук

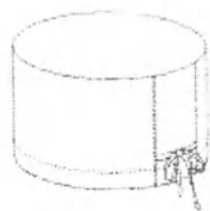

Шапочка

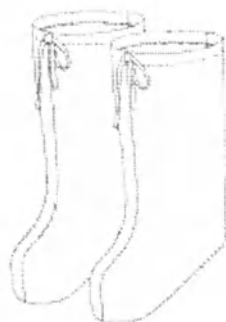

Бахилы

Способы и правила дезинфекции и стерилизации.

Медицинскую одежду (в том числе отдельные виды) необходимо поставлять пользователю с информацией изготовителя, выполненной в соответствии с требованиями ГОСТ 10581.

При работе с медицинской одеждой руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630, СанПиН 1.3.3118, СанПиН 1.3.2322. Стирка и дезинфекция белья, в т.ч. загрязненного кровью и другими биологическими субстратами, осуществляется ручным и механизированным способом при строгом соблюдении требований МУ 3.5.736-99 "Технология обработки белья в медицинских учреждениях".

Изделия должны быть устойчивы к обработке и выдерживать не менее 20 циклов стирки и дезинфекции при соблюдении рекомендованных режимов:

1) замачивание в 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ого раствора моющего средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья) в течение 60мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

2) замачивание и стирка в растворе дез.средства (ДС) "ГЛАВСТИРКА":

-белье замачивают в 2%-ном рабочем растворе средства (из расчета 5л на 1кг сухого белья), начальная температура раствора 60°C (в процессе дезинфекции не поддерживается), время замачивания 30мин., с последующей стиркой в растворе универсального моющего средства при температуре 60°C;

-при совмещении режимов дезинфекции и стирки белья механизированным способом использовать 2%-ный раствор средства, температура стирки 60°C, время стирки 30мин. (без учета времени полоскания и отжима).

Изделия из 100% хлопка должны быть устойчивы к кипячению, автоклавированию, и выдерживать не менее 10 циклов обеззараживания в паровом стерилизаторе при режиме: 132°C в течение 20 мин.

Цветное и белое белье обрабатывать отдельно. Допускается применение изделий в нестерильном виде после обработки изделия согласно данному пункту. Рекомендуется перед первым применением провести стирку изделия.

Остатки ДС и общие загрязнения удаляются способами, разработанными для ухода за изделиями из текстильных материалов. Готовые изделия должны содержать информацию по уходу. Обозначения и способы ухода разрабатывают в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 3758, ГОСТ 25652.

Примечание:

Отбеливание применяется только для изделий из тканей белого цвета.

Символы указаний о способах ухода:



Максимальная температура 95 °С
Механические воздействия обычные
Полоскание обычное
Отжим обычный



Максимальная температура 95 °С
Механические воздействия, уменьшенные
Полоскание при постепенном снижении температуры воды
Отжим ослабленный



Максимальная температура 70 °С
Механические воздействия обычные
Полоскание обычное
Отжим обычный



Максимальная температура 60 °С
Механические воздействия обычные
Полоскание обычное
Отжим обычный

Максимальная температура 60 °С



Механические воздействия, уменьшенные
Полоскание при постепенном снижении температуры воды
Отжим ослабленный



Максимальная температура 50 °C
Механические воздействия, уменьшенные
Полоскание при постепенном снижении температуры воды
Отжим ослабленный



Максимальная температура 40 °C
Механические воздействия обычные
Полоскание обычное
Отжим обычный



Максимальная температура 40 °C
Механические воздействия, уменьшенные
Полоскание при постепенном снижении температуры воды
Отжим ослабленный



Максимальная температура 40 °C
Механические воздействия, сильно уменьшенные
Полоскание обычное
Отжим ослабленный. Не выжимать руками



Максимальная температура 30 °C
Механические воздействия, сильно уменьшенные
Полоскание обычное
Отжим ослабленный



Только ручная стирка
Машинную стирку не применять
Максимальная температура 40 °C

Обращаться с осторожностью



Не стирать

Обращаться с осторожностью во влажном состоянии



Не отжимать



Сушку производить после отжима в подвешенном положении



Сушка в вертикально подвешенном положении сразу после стирки (запрещён ручной и автоматический отжим)



Сушка в горизонтальном положении



Сушка в растянутом виде



Сушить в защищённом от света месте



Любое отбеливание (при необходимости)



Отбеливание только кислородосодержащим/не хлорным веществом



Разрешено отбеливание хлорсодержащим веществом
Раствор холодный и разбавленный



Не отбеливать



Глажение при максимальной температуре прессующей поверхности (подошвы утюга, прессующей плиты) до 200 °C



Глажение при максимальной температуре прессующей поверхности (подошвы утюга, прессующей плиты) до 150 °C



Глажение при максимальной температуре прессующей поверхности (подошвы утюга, прессующей плиты) до 110 °C

Глажение и пропаривание требуют осторожности



Глажение запрещено

Пропаривание и обработку не применять

Сухая чистка любыми растворителями, используемыми для сухой чистки, включая

 все растворители, перечисленные для символа P, плюс трихлорэтилен и трихлорэтан

 Сухая чистка в тетрахлорэтилене, монофтортрихлорэтаноле и всех растворителях, перечисленных для символа F
Обычная процедура чистки

 Сухая чистка всеми растворителями, указанными для символа P
Строгие ограничения прибавления воды и/или увеличения температуры во время чистки и/или отжима. Чистка-самообслуживание запрещена

 Сухая чистка в трифтортрихлорэтаноле, уайт-спирте (температура дистилляции (перегонки) от 150°C до 210°C, точка возгорания от 38°C до 60°C). Обычная чистка без ограничений

 Сухая чистка всеми растворителями, указанными для символа F
Строгое ограничение прибавления воды (увеличение количества воды) и/или усиления механических воздействий и/или увеличения температуры во время чистки и/или отжима

 Сухая чистка запрещена
Удаление пятен растворителями запрещено

 Возможна сушка в барабане
Обычный процесс

 Возможна сушка в барабане
Сушка при более низкой температуре

 Не применять сушку в барабане

12. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одежда при эксплуатации должна быть устойчива к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 15150 для исполнения УХЛ категории 4.2. Номинальное значение температуры окружающей среды: от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность при температуре 25 °С – до 75%.

Не допускается контакт одежды с открытым пламенем и нагревательными приборами.

13. МАРКИРОВКА

Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и настоящих технических условий. На этикетках могут быть использованы необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Общие требования к маркировке изделий, способу и месту ее нанесения по ГОСТ 10581. Маркировка должна быть выполнена на ярлыках (этикетках). Ярлыки (этикетки) должны быть пришиты, навешены или прикреплены к одежде другим способом, обеспечивающим сохранность.

Маркировка комплекта должна содержать следующие необходимые сведения:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и/или его товарный знак;
- наименование и обозначение комплекта по настоящим техническим условиям;
- номер партии (серии);
- дату изготовления (месяц, год);
- информацию о сроке годности;
- размер;
- гарантии изготовителя;
- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле предприятием-изготовителем;
- правила утилизации;
- сведения о регистрационном удостоверении;

Допускается нанесение других сведений, в том числе рекламного характера.

«Символы по уходу» должны проставляться в соответствии с ГОСТ 16958. Мягкая лента с нанесенными символами по уходу за изделием вшивается в боковой шов или средний шов изделия.

Маркировка групповой упаковки должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и/или его товарный знак;
- общее наименование изделия;
- номер партии (серии);
- дата изготовления (месяц, год);
- информацию о сроке годности;
- информацию о регистрационном удостоверении

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192, с нанесённым манипуляционным знаком и «Беречь от влаги».

14. УПАКОВКА

Одежда должна быть упакована. Упаковка должна обеспечивать сохранность одежды от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к упаковке – по ГОСТ Р 50444 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза 16 августа 2011 г. №769).

В качестве транспортной тары могут применяться ящики деревянные по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198 или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

Допускается использовать другую упаковочную тару, в том числе производимую на предприятии-изготовителе одежды.

Влажность древесины тары, в которую упаковывается одежда, не должна превышать 22%.

Для защиты одежды от механических повреждений в местах соприкосновения друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства такие как индивидуальная и/или групповая упаковки, изготовленные из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354.

Масса любого места (ящика) брутто должна быть не более 20 кг.

15. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование одежды осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура – от –50 до +50°C;

влажность: до 100%

Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий осуществляется в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортировки в части действия климатических факторов – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от -50 до +50 °С, относ. влаж. до 100%.

Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий производят в соответствии с ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020 и действующими правилами для данного вида транспортных средств.

16. ХРАНЕНИЕ

Одежду хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от 10 до 40 °С, относ. влаж. до 95%. Условия хранения исключают воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред, а также прямых солнечных лучей.

17. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплектов требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования, обозначенных в инструкции по применению.

Срок годности одежды, при соблюдении условий эксплуатации – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты производства.

18. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Одежда утилизируется в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.7.2790-10 (по классу Б- эпидемиологически опасные отходы).

По вопросам утилизации обращаться: ИП Опришко А.А., юр.адрес: 603087, г.Нижний Новгород, ул.Слобода Верхне-Печерская, дом 421"б"

19. РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1) Риск: Загрязнения одежды.

Метод устранения: При загрязнении комплекта необходимо его постирать.

Примечание: При отсутствии видимых загрязнений, комплект необходимо стирать не реже одного раза в 2 дня. Не смешивайте цветные и белые комплекты.

2) По окончании срока годности, одежду необходимо утилизировать.

Примечание: Перед утилизацией одежду необходимо постирать.

3) Риск: разрыв ткани одежды

Примечание: Неправильная эксплуатация и уход за одеждой могут оказать влияние на прочность материала.

Метод устранения: Одежда должен быть утилизирован.

20 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническому обслуживанию и ремонту комплект не подлежит. Комплект должен быть утилизирован при сильных загрязнениях и повреждениях ткани и фурнитуры. (См. п. 9 настоящих технических условий)

21. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

Рекламации направлять: ИП Опришко А.А. 603087, г.Нижний Новгород, ул.Слобода Верхне-Печерская, дом 421"б".

22. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа, на который дана ссылка
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
Приказ Минздрава России № 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
ГОСТ Р 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 12807-2003	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
ГОСТ 21219-88	Изделия ведомственного назначения. Допуски при раскрое деталей белья, санитарно-госпитальной одежды и постельных принадлежностей
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016	Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
ОСТ 17-835-80	Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 28546-2002	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия
ГОСТ ISO 10993 (серия)	Серия «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», части: часть 1. Оценка и исследования; часть 9. Основные принципы идентификации и количественного

	определения потенциальных продуктов деградации; часть 11. Исследования общетоксического действия; часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы; часть 18. Исследование химических свойств материалов
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 10581-91	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение
ГОСТ 16958-71	Изделия текстильные. Символы по уходу
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 12301-2006	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 9142-90	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
ГОСТ 50729-95	Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида
ГОСТ 12.4.021-75	Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГН 2.2.5.1313-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГН 2.2.5.1314-03	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГОСТ 12.1.016-79	Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
ГОСТ 12.4.280-2014	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических

	воздействий. Общие технические требования
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.4.009-83	Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.3.002-2014	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.0.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.019-2009	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты стандартов безопасности.
ГОСТ 12.1.018-93	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.2.032-78	Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.033-78	Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
ГОСТ 17.1.1.01-77	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.
ГОСТ 17.1.3.13-86	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.2.3.02-2014	Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 17.2.1.04-77	Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения
ГОСТ 30157.0-95	Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения
ГОСТ ISO 3759-2013	Материалы текстильные. Подготовка, маркировка и измерение

	образцов текстильных материалов и одежды при испытаниях для определения изменения размеров
ГОСТ 31214-2003	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность.
ГОСТ 23134-78	Уборы головные медицинские. Технические условия.
ГОСТ 9897-88	Комплект мужской санитарной одежды. Технические условия
ГОСТ 9896-88	Комплект женской санитарной одежды. Технические условия

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28 мая 2010 года № 299

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 №32)

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза 16 августа 2011 г. №769).

СанПиН 2.1.3.2630 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 июня 2016 года)

СанПиН 1.3.3118 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)"

СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней

МУ 3.5.736-99 Технология обработки белья в медицинских учреждениях

23. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка о продаже

Категория изделия _____

Производитель _____

Штамп

продавца

Дата продажи _____

Организация продавец _____

Подпись продавца _____

Изделие проверено, повреждений не имеет. Нестерильно.

С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

По вопросам гарантии обращаться: ИП Опришко А.А., юр.адрес: 603087, г.Нижний Новгород, ул.Слобода Верхне-Печерская, дом 421"б".

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Все графы талона (за исключением граф для производителя/поставщика) должны быть заполнены.

При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

Прошито, прошнуровано и
и скреплено печатью

74 (ссылка на 4-й лист)
/Опришко А.А./

