

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Пелигрин Матен»**



А.М. Прокопеня

«16» августа 2019 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Набор белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый,
стерильный и нестерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-001-84005787-2008**

2019

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный и нестерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-001-84005787-2008 (далее по тексту «набор», «изделие»).

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

См. Приложение №1 настоящей инструкции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный и нестерильный, «Пелигрин», предназначен для применения взамен хлопчатобумажного медицинского белья при оказании лечебно-профилактической помощи, оперативных вмешательствах, родах, в процедурных и перевязочных кабинетах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор может быть использован в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и быту.

КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наборы относятся к изделиям однократного применения.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Высший, средний и младший медицинский персонал.

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Изделия изготавливаются в стерильном и нестерильном виде.

Стерилизация наборов в стерильном исполнении осуществляется радиационным способом по ГОСТ ISO 11137-1-2011. Значение поглощенной дозы в продукции при радиационной стерилизации 20 +/- 5кГр.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Показания к применению медицинского изделия: для применения взамен хлопчатобумажного медицинского белья при оказании лечебно-профилактической помощи, оперативных вмешательствах, родах, в процедурных и перевязочных кабинетах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается использовать изделия, если:

- истек срок годности;
- изделия имеют внешние дефекты в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны аллергические реакции при наличии индивидуальной непереносимости используемых материалов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Провести визуальный осмотр индивидуальной упаковки.
- Освободить изделие от индивидуальной упаковки.
- Проверить целостность изделия, методом визуального осмотра.

Использовать изделие в соответствии с наименованием и функциональным назначением в каждом конкретном случае, исходя из ситуации и необходимости.

Классификация медицинского изделия .

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурой классификацией медицинских изделий: код 330720; 330730

КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

Изделие кратковременного контакта.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки Набора белья медицинского, из нетканых материалов, одноразового стерильного и нестерильного «Пелигрин» ТУ 9398-001-84005787-2008 должны входить:

- Набор белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-001-84005787-2008 в соответствии с вариантом исполнения, представленным в Приложении №1 в индивидуальной упаковке – 1 уп.

или Набор белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый, нестерильный «Пелигрин» ТУ 9398-001-84005787-2008 в соответствии с вариантом исполнения, представленным в Приложении №1 в индивидуальной упаковке – 1 уп.

- Этикетка – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание внешнего вида

- Изделия Набора могут выпускаться окрашенными или неокрашенными.
- Простыни должны быть прямоугольной формы, цельнокроеные, края не обработаны. По согласованию с заказчиком допускается комбинация элементов различных простыней, предусмотренных настоящими ТУ, в одном изделии.
- Рукав для размещения кабелей и шлангов должен быть одношовным, с двумя отверстиями, края не обработаны. Может иметь завязки.
- Салфетки для обработки кожи должны быть прямоугольной формы, цельнокроеные, края не обработаны.
- Трусы гинекологические (послеродовые) должны быть с резинкой на талии и резинками на отверстиях для ног, края не обработаны.
- Бирка для новорожденного должна быть прямоугольной формы, цельнокроеные, края не обработаны.
- Бахилы высокие должны быть одношовными, собранными по верхнему краю на резинке или на завязках. Бахилы-леггинсы для пациента должны быть одношовными, собранными по верхнему краю на завязках или с липким краем. По согласованию с заказчиком допускается изготавливать подошву бахил однослойную или двухслойную, с использованием защитных полиэтиленовых вставок. Края бахил не обработаны.
- Рубашка для пациента должна быть с короткими цельнокроеными рукавами с запахом спереди, без воротника, на завязках или на текстильной застежке типа «Контакт». Спинка рубашки должна быть цельнокроеная. Рукава и низ рубашки не обработаны.
- Головной убор типа «Берет» для пациента должен быть собран на резинке вдоль окружности, края не обработаны.
- Соединения деталей изделий в Наборе должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 4103, или ультразвуковой либо термической сваркой. Соединение деталей должно осуществляться нитками хлопчатобумажными по ГОСТ 6309.
- Швы деталей белья Набора должны быть ровными, без пропусков стежков и прочными.
- Поверхности изделий Набора не должны иметь внешних дефектов в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений

Общий вид изделий

Общий вид изделий, входящих в Набор представлен в Приложении 2 (рисунки 1 – 13).

Основные линейные размеры

Основные линейные размеры изделий, входящих в Набор должны соответствовать требованиям, представленным в таблицах № 1 - № 22.

Таблица 1

Простыня (большая и малая).

Большая	
Длина, см	200,0 ± 10,0
Ширина, см	140,0 ± 10,0
Малая	
Длина, см	80,0 ± 5,0
Ширина, см	70,0 ± 5,0

Таблица 2.

Простыня с карманом.

Длина, см	160,0 ± 10,0
Ширина, см	70,0 ± 5,0
Длина кармана, см	70,0 ± 5,0
Ширина кармана, см	40,0 ± 5,0

Таблица 3 (к рисунку 1).

Простыня с липким слоем (большая и малая).

Большая	
Длина, см	200,0 ± 10,0
Ширина, см	100,0 ± 10,0
Длина клеевого слоя, см	50,0 ± 5,0
Ширина клеевого слоя, см	3,0 ± 0,5
Малая	
Длина, см	80,0 ± 5,0
Ширина, см	70,0 ± 5,0
Длина клеевого слоя, см	50,0 ± 5,0
Ширина клеевого слоя, см	3,0 ± 0,5

Таблица 4 (к рисунку 2).

Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом (большая и малая).

Большая	
Длина простыни, см	240,0 ± 10,0
Ширина простыни, см	140,0 ± 10,0
Длина отверстия, см	30,0 ± 3,0
Ширина отверстия, см	30,0 ± 3,0
Длина кармана, см	80,0 ± 5,0
Ширина кармана, см	70,0 ± 3,0
Длина отвода, см	90 ± 10,0
Малая	
Длина простыни, см	160,0 ± 10,0
Ширина простыни, см	100,0 ± 10,0
Длина отверстия, см	15,0 ± 2,0
Ширина отверстия, см	10,0 ± 1,0
Длина кармана, см	30,0 ± 3,0
Ширина кармана, см	20,0 ± 2,0

Таблица 5 (к рисунку 3).

Простыня со вставкой из разрезаемой пленки (большая и малая).

Большая	
Длина простыни, см	200,0 ± 10,0
Ширина простыни, см	140,0 ± 10,0
Длина вставки, см	30,0 ± 3,0
Ширина вставки, см	30,0 ± 3,0
Малая	
Длина простыни, см	140,0 ± 10,0
Ширина простыни, см	70,0 ± 5,0
Длина вставки, см	20,0 ± 2,0
Ширина вставки, см	15,0 ± 2,0

Таблица 6 (к рисунку 4).

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза.

Длина, см	140,0 ± 10,0
Ширина, см	100,0 ± 10,0
Длина выреза, см	40,0 ± 4,0
Ширина клеевого слоя, см	3,0 ± 0,5

Таблица 7 (к рисунку 5).

Простыня с прозрачным краем, впитывающей зоной, отверстиями со вставкой из разрезаемой пленки.

Длина, см	300 ± 10,0
Ширина, см	200 ± 10,0
Ширина прозрачного края, см	60 ± 5,0
Длина впитывающей зоны, см	70 ± 5
Ширина впитывающей зоны, см	40 ± 3
Длина отверстия, см	11 ± 1
Ширина отверстия, см	8 ± 1

Таблица 8 (к рисунку 6).

Карман с липким краем

Длина, см	60,0 ± 5,0
Ширина, см	40,0 ± 3,0
Ширина клеевого слоя, см	3,0 ± 0,5

Таблица 9 (к рисунку 7).

Рукав для размещения кабелей и шлангов.

Длина, см	не менее 200,0
Ширина, см	13,0 ± 1,0

Таблица 10.

Салфетки для обработки кожи (большая и малая)

Большая	
Длина, см	40,0 ± 3,0
Ширина, см	40,0 ± 3,0
Малая	
Длина, см	20,0 ± 2,0
Ширина, см	20,0 ± 2,0

Таблица 11.

Мешок санитарный.

Длина, см	100,0 ± 10,0
Ширина, см	70,0 ± 10,0

Таблица 12.

Чехол на инструментальный стол.

Длина, см	140,0 ± 5,0
Ширины, см	80,0 ± 5,0
Высота, см	10,0 ± 1,0

Таблица 13.

Чехол на операционный стол.

Длина, см	200,0 ± 10,0
Ширины, см	80,0 ± 5,0
Высота, см	20,0 ± 2,0

Таблица 14 (к рисунку 8).

Трусы гинекологические (послеродовые), размер 50 – 54.

Объем при растянутой резинке, см	115,0 ± 10,0
Высота, см	25,0 ± 2,0
Ширина отверстия в области бедра, см	35,0 ± 3,0

Таблица 15 (к рисунку 9).

Шорты проктологические, размер 48 – 54, рост 170 – 182.

Длина по боковому шву Н1, см	50 ± 5,0
Длина по шаговому шву Н2, см	25 ± 5,0
Ширина в талии при растянутой резинке L, см	55 ± 5,0
Длина отверстия по шву Н3, см	10 ± 3,0

Таблица 16.

Бирка для новорожденного.

Длина, см	10,0 ± 1,0
Ширина, см	80,0 ± 1,0

Таблица 17 (к рисунку 10).

Бахилы высокие.

Высота, Н, см	55,0 ± 3,0
Ширина, С, см	25,0 ± 2,0
Длина следа, L, см	35,0 ± 3,0

Таблица 18 (к рисунку 11).

Бахилы-леггинсы для пациента.

Длина, см	100,0 ± 10,0
Ширина, см	40,0 ± 3,0

Рубашка для пациента, размер 50 – 54, рост 170 – 176. Таблица 19 (к рисунку 12).

Длина переда, от середины горловины до низа, М, см	120,0 ± 10,0
Ширина рубашки на уровне проймы, N, см	80,0 ± 5,0

Головной убор типа «Берет» для пациента. Таблица 20 (к рисунку 13).

Диаметр при растянутой резинке, L, см	не менее 50,0
---------------------------------------	---------------

Наволочка. Таблица 21.

Длина, см	60,0 ± 5,0
Ширина, см	60,0 ± 5,0

Пододеяльник. Таблица 22.

Длина, см	200,0 ± 10,0
Ширина, см	140,0 ± 10,0

Примечание: по требованию заказчика допускается изготавливать изделия, входящие в Набор, других размеров.

Технические характеристики

Изделия Набора должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 23.

Таблица 23.

Наименование изделия.	Поверхностная плотность, г/м ² не менее	Разрывная нагрузка, кгс. не менее				Водоупорность, мм в д. ст. не менее
		в сухом состоянии		во влажном состоянии		
		в машинном направлении	в поперечном направлении	в машинном направлении	в поперечном направлении	
1. Простыня (большая и малая):						
- неламинированная;	25,0	4,5	2,5	4,5	2,5	—
- ламинированная.	40,0	6,0	4,0	6,0	4,0	500
2. Простыня с карманом:						
- неламинированная;	25,0	4,5	2,5	4,5	2,5	—
- ламинированная.	40,0	6,0	4,0	6,0	4,0	500
3. Простыня с липким слоем (большая и малая):						
- неламинированная;	25,0	4,5	2,5	4,5	2,5	—
- ламинированная.	40,0	6,0	4,0	6,0	4,0	500
4. Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом (большая и малая):						
- неламинированная;	25,0	4,5	2,5	4,5	2,5	—
- ламинированная.	40,0	6,0	4,0	6,0	4,0	500
5. Простыня со вставкой из разрезаемой пленки (большая и малая):						
- неламинированная;	25,0	4,5	2,5	4,5	2,5	—
- ламинированная.	40,0	6,0	4,0	6,0	4,0	500
6. Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза:						
- неламинированная;	25,0	4,5	2,5	4,5	2,5	—
- ламинированная.	40,0	6,0	4,0	6,0	4,0	500

7. Простыня с прозрачным краем, впитывающей зоной, отверстиями со вставкой из разрезаемой пленки: - неламинированная; - ламинированная.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500
8. Карман с липким краем: - неламинированный; - ламинированный.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500
9. Рукав для размещения кабелей и шлангов: - неламинированный; - ламинированный.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500
10. Салфетки для обработки кожи (большая и малая);	25,0	4,5	2,5	4,5	2,5	—
11. Мешок санитарный; - неламинированный; - ламинированный.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500
12. Чехол на инструментальный стол: - неламинированный; - ламинированный.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500
13. Чехол на операционный стол: - неламинированный; - ламинированный.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500
14. Трусы гинекологические (послеродовые);	25,0	4,5	2,5	4,5	2,5	—
15. Шорты проктологические; - неламинированные; - ламинированные.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500
16. Бирка для новорожденного: - неламинированная; - ламинированная.	25,0 40,0	— —	— —	— —	— —	— —
17. Бахилы высокие: - неламинированные; - ламинированные.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500
18. Бахилы-леггинсы для пациента: - неламинированные; - ламинированные.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500
19. Рубашка для пациента: - неламинированная; - ламинированная.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500
20. Головной убор типа «Берет» для пациента;	17,0	2,0	1,5	2,0	1,5	—
21. Наволочка;	25,0	4,5	2,5	4,5	2,5	—
22. Пододеяльник.	25,0	4,5	2,5	4,5	2,5	—

Материалы и покупные изделия

- Материалы и покупные изделия, применяемые при изготовлении набора - см. приложение 3 настоящей инструкции.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Транспортирование

Наборы транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Хранение

Хранение Наборов у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения по группе 1 по ГОСТ 15150.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

Эксплуатация

Набор изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие качества Наборов требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.
- Гарантийный срок годности стерильных Наборов 4 года со дня изготовления
- Гарантийный срок годности не стерильных Наборов 5 лет со дня изготовления

УТИЛИЗАЦИЯ

- Использованные изделия относятся к отходам класса А или Б и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).
- Допускается утилизировать изделия, утратившие товарный вид, вместе с бытовым мусором.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Пелигрин Матен» (ООО «Пелигрин Матен»)

Юридический адрес производителя: Россия, 17574, г. Москва, проезд Одоевского, д.3, кор.7., эт.1, пом.II, оф.97. Тел. +7 (495) 785-56-71. E-mail: info@peligrin.ru.

Адреса мест производства:

ООО «Санте», Россия, 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, Каширское шоссе, дом 11.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии по поводу качества медицинского изделия направляются в:

Общество с ограниченной ответственностью «Пелигрин Матен» (ООО «Пелигрин Матен»)

Телефон: +7 (495) 785-56-71

Адрес электронной почты: info@peligrin.ru

СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный и не стерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-001-84005787-2008:

I. Набор белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-001-84005787-2008:

- Набор №1 стерильный.

- Простыня большая - 1 шт.
- Простыня малая - 1 шт.
- Простыня с карманом - 1 шт.
- Простыня с липким слоем большая - 1 шт.
- Простыня с липким слоем малая - 1 шт.
- Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом большая - 1 шт.
- Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом малая - 1 шт.
- Простыня со вставкой из разрезаемой пленки большая - 1 шт.
- Простыня со вставкой из разрезаемой пленки малая - 1 шт.
- Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза - 1 шт.
- Простыня с прозрачным краем, впитывающей зоной, отверстиями со вставкой из разрезаемой пленки - 1 шт.
- Карман с липким краем - 1 шт.
- Рукав для размещения кабелей и шлангов - 1 шт.
- Салфетки для обработки кожи большая - 1 шт.
- Салфетки для обработки кожи малая - 1 шт.
- Пленка разрезаемая - 1 шт.
- Мешок санитарный - 1 шт.
- Чехол на инструментальный стол - 1 шт.
- Чехол на операционный стол - 1 шт.
- Подстилка впитывающая - 1 шт.
- Пеленка впитывающая - 1 шт.
- Прокладки для груди - 1 пара.
- Прокладка впитывающая - 1 шт.
- Трусы гинекологические (послеродовые) - 1 шт.
- Шорты проктологические - 1 шт.
- Бирка для новорожденного - 2 шт.
- Бахилы высокие - 1 пара
- Бахилы-леггинсы для пациента - 1 пара.
- Рубашка для пациента - 1 шт.
- Головной убор типа «Берет» для пациента - 1 шт.
- Наволочка - 1 шт.
- Пододеяльник - 1 шт.
- Набор №2 стерильный**
- Простыня большая - не более 10 шт.
- Набор №3 стерильный**
- Простыня малая - не более 20 шт.
- Набор №4 стерильный**
- Простыня с карманом - не более 5 шт.
- Набор №5 стерильный**
- Простыня с липким слоем большая - не более 10 шт.
- Набор №6 стерильный**
- Простыня с липким слоем малая - не более 20 шт.
- Набор №7 стерильный**
- Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом большая - не более 2 шт.
- Набор №8 стерильный**
- Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом малая - не более 5 шт.
- Набор №9 стерильный**
- Простыня со вставкой из разрезаемой пленки большая - не более 5 шт.
- Набор №10 стерильный**
- Простыня со вставкой из разрезаемой пленки малая - не более 5 шт.
- Набор №11 стерильный**
- Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза - не более 10 шт.

-Набор №12 стерильный
 Простыня с прозрачным краем, впитывающей зоной, отверстиями со вставкой из разрезаемой пленки – не более 5 шт.
 -Набор №13 стерильный
 Карман с липким краем – не более 10 шт
 -Набор №14 стерильный
 Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.
 -Набор №15 стерильный
 Салфетки для обработки кожи большая - не более 20шт
 -Набор №16 стерильный
 Салфетки для обработки кожи малая - не более 40шт
 -Набор №17 стерильный
 Пленка разрезаемая- не более 10 шт.
 -Набор №18 стерильный
 Мешок санитарный – не более 10 шт.
 -Набор №19 стерильный
 Чехол на инструментальный стол – не более 3 шт.
 -Набор №20 стерильный
 Чехол на операционный стол - не более 2 шт.
 -Набор №21 стерильный
 Подстилка впитывающая – не более 10 шт.
 -Набор №22 стерильный
 Пеленка впитывающая –не более 10 шт.
 - Набор №22 стерильный
 Прокладки для груди - не более 50пар
 -Набор №24 стерильный
 Прокладка впитывающая –не более 60шт
 - Набор №25 стерильный
 Трусы гинекологические (послеродовые) – не более 10шт
 - Набор №26 стерильный
 Шорты проктологические – не более 10шт
 -Набор №27 стерильный
 Бахилы высокие – не более 10 пар
 -Набор №28 стерильный
 Бахилы-леггинсы для пациента – не более 10 пар
 -Набор №29 стерильный
 Рубашка для пациента – не более 10 шт
 -Набор №30 стерильный
 Головной убор типа «Берет» для пациента –не более10 шт.
 -Набор №31 стерильный
 Наволочка – не более 10 шт
 -Набор №32 стерильный
 Пододеяльник – не более 10 шт.
 -Набор №33 стерильный .
 Простыня малая - не более 10 шт.
 Простыня большая - не более 10 шт.
 -Набор № 34 стерильный .
 Простыня большая – не более 10 шт.
 Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
 Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
 -Набор №35 стерильный
 Простыня малая - не более 10 шт
 Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
 -Набор № 36 стерильный
 Простыня с липким краем большая – не более 10 шт.
 Простыня малая - не более 10 шт.
 - Набор №37 стерильный .
 Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
 Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
 Простыня малая - не более 10 шт.
 Мешок санитарный– не более 10 шт.

-Набор №38 стерильный.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
Простыня малая - не более 10 шт
Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
Бахилы высокие - не более 10пар.
-Набор №39 стерильный.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Простыня малая - не более 10 шт
Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
Бахилы высокие - не более 10пар.
- Набор № 40 стерильный .
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
Бахилы высокие - не более 10пар
Простыня большая – не более 10 шт.
- Набор № 41 стерильный .
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Бахилы высокие - не более 10пар
Простыня большая – не более 10 шт.
-Набор № 42 стерильный .
Салфетки для обработки кожи большие– не более 30 шт.
Бахилы высокие - не более 10пар.
Простыня малая - не более 10 шт.
-Набор № 43 стерильный .
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Бахилы высокие - не более 10пар.
Простыня малая - не более 10 шт
-Набор №44 стерильный .
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
-Набор №45 стерильный .
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза - не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
-Набор №46 стерильный .
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза - не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
-Набор №47 стерильный .
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза - не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт
Салфетки для обработки кожи большие– не более 30 шт.
Простыня большая - не более 10 шт.
-Набор №48 стерильный .
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза - не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Простыня большая - не более 10 шт.
-Набор №49 стерильный .
Карман с липким краем - не более 6 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 3 шт.
-Набор №50 стерильный .
Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.
-Набор №51 стерильный .
Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 10шт.

-Набор №52 стерильный

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.

- Набор №53 стерильный .

Простыня малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

- Набор №54 стерильный .

Простыня малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор №55 стерильный .

Мешок санитарный – не более 5 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

-Набор № 56 стерильный .

Простыня с карманом – не более 10шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

-Набор №57 стерильный .

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Бахилы-легинысы для пациента – не более 10 пар

Простыня малая - не более 10 шт

Пеленка впитывающая – не более 16 шт.

-Набор №58 стерильный .

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Бахилы-легинысы для пациента – не более 10 пар

Простыня малая - не более 10 шт

Пеленка впитывающая – не более 16 шт.

-Набор №59 стерильный

Простыня малая - не более 10 шт

Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор №60 стерильный

Простыня малая - не более 10 шт

Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор №61 стерильный

Простыня малая - не более 10 шт

Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10шт.

Бахилы высокие - не более 10пар.

-Набор №62 стерильный

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая - не более 10шт

Простыня малая - не более 10 шт.

Мешок санитарный – не более 10шт

Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

-Набор №63 стерильный

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Бахилы-легинысы для пациента – не более 10 пар.

-Набор №64 стерильный .

Чехол на инструментальный стол – не более 10шт
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт
Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор №65 стерильный .

Чехол на инструментальный стол – не более 10шт
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт
Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор № 66 стерильный

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

-Набор № 67 стерильный

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

-Набор №68 стерильный

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.

-Набор №69 стерильный

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.

-Набор №70 стерильный

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

-Набор № 71 стерильный

Простыня с липким слоем большая– не более 10 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

-Набор № 72 стерильный

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

-Набор №73 стерильный

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 10шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

-Набор №74 стерильный

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие– не более 30 шт.

-Набор №75 стерильный

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор №76 стерильный .

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор №77 стерильный .

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор №78 стерильный

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем большая - не более 10 шт.
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

-Набор №79 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем большая - не более 10 шт.
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор №80 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем большая - не более 10 шт.
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор №81 стерильный .

Простыня большая - не более 10 шт.
Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.

-Набор №82 стерильный

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор №83 стерильный

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор №84 стерильный

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор №85 стерильный

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор №86 стерильный

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор №87 стерильный

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор №88 стерильный

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.
Карман с липким краем – не более 10 шт.

-Набор №89 стерильный

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.
Карман с липким краем – не более 10 шт.

-Набор №90 стерильный .

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
Карман с липким краем – не более 10 шт.

-Набор №91 стерильный .

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Карман с липким краем – не более 10 шт.

-Набор №92 стерильный .

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор №93 стерильный .

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.
Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор №94 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

- Набор №95 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Простыня с липким слоем большая - не более 10 шт.

-Набор №96 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Рубашка для пациента – не более 10 шт.
Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

-Набор №97 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Рубашка для пациента – не более 10 шт.
Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
Бахилы высокие – не более 10 пар.

-Набор №98 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Рубашка для пациента – не более 10 шт.
Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
Бахилы высокие – не более 10 пар
Прокладки впитывающие – не более 30 шт.

-Набор №99 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Рубашка для пациента (длина - 110,120,130,140 см) – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Прокладки впитывающие – не более 30 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор №100 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Рубашка для пациента (длина - 110,120,130,140 см) – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Прокладки впитывающие – не более 30 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор № 101 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

-Набор № 102 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор № 103 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор №104 стерильный .

Простыня большая - не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Карман с липким краем – не более 10 шт.

-Набор №105 стерильный .

Простыня большая - не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Карман с липким краем – не более 10 шт.

-Набор № 106 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Карман с липким краем – не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

-Набор № 107 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Карман с липким краем – не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

-Набор №108 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Карман с липким краем - не более 10 шт.

Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.

-Набор №109 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Карман с липким краем - не более 10 шт.

Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.

-Набор №110 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

-Набор № 111 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.

-Набор №112 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Чехол на операционный стол – не более 10 шт.

-Набор №113 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Чехол на операционный стол – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор №114 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Чехол на операционный стол – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор № 115 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Чехол на операционный стол – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.

-Набор № 116 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Чехол на операционный стол – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Чехол на инструментальный стол – не более 10 шт.

-Набор №117 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Чехол на операционный стол – не более 10 шт.

Бахилы-леггинсы для пациента – не более 10 пар

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

-Набор №118 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с липким слоем большая – не более 10 шт

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Бахилы-леггинсы для пациента – не более 10 пар

-Набор №119 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие– не более 30 шт.

-Набор №120 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор №121 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Простыня с липким слоем малая - не более 10 шт.

Бахилы-леггинсы для пациента– не более 10 пар.

-Набор №122 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Бахилы-леггинсы для пациента – не более 10 пар.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор №123 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Бахилы-леггинсы для пациента – не более 10 пар.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор № 124 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

-Набор № 125 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

-Набор №126 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Шорты проктологические – не более 10 шт.

-Набор № 127 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Шорты проктологические – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор № 128 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Шорты проктологические – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор №129 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Шорты проктологические – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар

-Набор №130 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Шорты проктологические – не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Карман с липким краем – не более 10 шт.

-Набор №131 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Шорты проктологические – не более 10 шт.

Карман с липким краем – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

-Набор №132 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Шорты проктологические – не более 10 шт.

Карман с липким краем – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

-Набор №133 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Шорты проктологические – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

-Набор №134 стерильный .

Карман с липким краем – не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Мешок санитарный – не более 10 шт.

-Набор № 135 стерильный .

Карман с липким краем – не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Мешок санитарный – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор № 136 стерильный .

Карман с липким краем – не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Мешок санитарный – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор №137 стерильный .

Наволочка – не более 10 шт.

Поддежальник – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

-Набор №138 стерильный .

Наволочка – не более 10 шт.

Пододеяльник – не более 10 шт.

-Набор №139 стерильный .

Наволочка – не более 10 шт.

Пододеяльник – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

-Набор №140 стерильный .

Наволочка – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

-Набор № 141 стерильный .

Наволочка – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

-Набор №142 стерильный .

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Простыня с карманом – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Бирка для новорожденного – не более 10 шт.

-Набор №143 стерильный .

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Простыня с карманом – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Бирка для новорожденного – не более 10 шт.

-Набор № 144 стерильный .

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар

Простыня малая - не более 10 шт.

Бирка для новорожденного – не более 10 шт.

- Набор № 145 стерильный .

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар

Простыня малая - не более 10 шт.

Бирка для новорожденного – не более 10 шт.

-Набор №146 стерильный .

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Простыня малая - не более 10 шт.

Бирка для новорожденного – не более 10 шт.

Простыня с карманом – не более 10 шт.

-Набор №147 стерильный .

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.
 Простыня малая - не более 10 шт.
 Бирка для новорожденного – не более 10 шт.
 Простыня с карманом – не более 10 шт.
-Набор № 148 стерильный.
 Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
 Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
 Рубашка для пациента – не более 10 шт.
 Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
 Бахилы высокие – не более 10 пар
 Простыня малая - не более 10 шт.
 Прокладки впитывающие – не более 20 шт.
-Набор № 149 стерильный.
 Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
 Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
 Рубашка для пациента – не более 10 шт.
 Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
 Бахилы высокие – не более 10 пар
 Простыня малая - не более 10 шт.
 Прокладки впитывающие – не более 20 шт.
-Набор № 150 стерильный.
 Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
 Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
 Рубашка для пациента – не более 10 шт.
 Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
 Бахилы высокие – не более 10 пар
 Простыня малая - не более 10 шт.
-Набор № 151 стерильный.
 Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
 Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
 Рубашка для пациента – не более 10 шт.
 Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
 Бахилы высокие – не более 10 пар
 Простыня малая - не более 10 шт.
-Набор № 152 стерильный.
 Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
 Простыня с карманом – не более 10 шт.
 Рубашка для пациента – не более 10 шт.
 Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
 Бахилы высокие – не более 10 пар
 Простыня малая - не более 10 шт.
-Набор № 153 стерильный.
 Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
 Рубашка для пациента – не более 10 шт.
 Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
 Бахилы высокие – не более 10 пар
 Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
 Простыня большая – не более 10 шт.
-Набор № 154 стерильный.
 Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
 Рубашка для пациента – не более 10 шт.
 Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
 Бахилы высокие – не более 10 пар
 Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
 Простыня большая – не более 10 шт.
-Набор № 155 стерильный.
 Рубашка для пациента – не более 10 шт.
 Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
 Бахилы высокие – не более 10 пар
 Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
 Простыня большая – не более 10 шт.
 Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор № 156 стерильный .

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор № 157 стерильный .

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор № 158 стерильный .

Простыня малая - не более 10 шт.

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

-Набор № 159 стерильный .

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

-Набор № 160 стерильный .

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор № 161 стерильный .

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор №162 стерильный .

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

-Набор №163 стерильный .

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

-Набор № 164 стерильный .

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Прокладки впитывающие – не более 20 шт.

-Набор № 165 стерильный .

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Прокладки впитывающие – не более 20 шт.

-Набор № 166 стерильный .

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Прокладки для груди – не более 20 пар.

-Набор № 167 стерильный .

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Рубашка для пациента – не более 10 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Бахилы высокие – не более 10 пар.
Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
Прокладки для груди – не более 20 пар.

-Набор № 168 стерильный .

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
Рубашка для пациента – не более 10 шт.
Бахилы высокие – не более 10 пар.
Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
Простыня с карманом – не более 10 шт.
Прокладки впитывающие – не более 20 шт.
Бирка для новорожденного – не более 10 шт.

-Набор № 169 стерильный .

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Рубашка для пациента – не более 10 шт.
Бахилы высокие – не более 10 пар.
Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
Простыня с карманом – не более 10 шт.
Прокладки впитывающие – не более 20 шт.
Бирка для новорожденного – не более 10 шт.

-Набор № 170 стерильный .

Прокладки для груди – не более 20 пар
Прокладки впитывающие – не более 20 шт.
Простыня малая - не более 10 шт.
Рубашка для пациента – не более 10 шт.
Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

-Набор № 171 стерильный .

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.
Рубашка для пациента – не более 10 шт.
Бахилы высокие – не более 10 пар.
Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
Простыня с карманом – не более 10 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
Бирка для новорожденного – не более 10 шт.

-Набор № 172 стерильный .

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.
Рубашка для пациента – не более 10 шт.
Бахилы высокие – не более 10 пар.
Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
Простыня с карманом – не более 10 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
Бирка для новорожденного – не более 10 шт.

-Набор №173 стерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.
Бахилы высокие – не более 10 пар.
Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.
Простыня с карманом – не более 10 шт.
Простыня большая – не более 10 шт.
Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
Прокладки впитывающие – не более 20 шт.

-Набор №174 стерильный .

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.
Рубашка для пациента – не более 10 шт.
Бахилы высокие – не более 10 пар
Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

-Набор № 175 стерильный .

Рубашка для пациента - не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Прокладки впитывающие – не более 12 шт.

Трусы гинекологические (послеродовые) – не более 10шт.

-Набор № 176 стерильный .

Прокладки впитывающие – не более 12 шт.

Трусы гинекологические (послеродовые) – не более 10шт.

-Набор № 177 стерильный .

Прокладки впитывающие – не более 12 шт.

Трусы гинекологические (послеродовые)– не более 10шт

Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор №178 стерильный .

Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом большая - не более 2шт.

Простыня большая - не более 10 шт.

-Набор № 179 стерильный .

Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом большая - не более 2шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор №180 стерильный .

Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом большая - не более 2шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор №181 стерильный .

Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом большая - не более 2шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор №182 стерильный .

Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом большая - не более 2шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

-Набор № 183 стерильный .

Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом большая - не более 2шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

- Набор № 184 стерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с карманом – не более 10 шт.

Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом малая - не более 5 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Прокладки для груди – не более 20 пар

Прокладки впитывающие – не более 12 шт.

Трусы гинекологические (послеродовые)– не более 10шт

Бирка для новорожденного – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Рубашка для пациента– не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Наволочка – не более 10 шт.

Пододеяльник – не более 10 шт.

-Набор №185 стерильный .

Простыня малая - не более 10 шт

Простыня большая– не более 10 шт.

II. Набор белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый, нестерильный «Пелигрин» ТУ 9398-001-84005787-2008 :

-Набор № 1 нестерильный

Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор №2 нестерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

-Набор №3 нестерильный .

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня большая– не более 10 шт.

-Набор №4 нестерильный

Простыня с вырезом и липким слоем по краю выреза – не более 10шт.

-Набор №5 нестерильный

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

-Набор №6 нестерильный

Салфетки для обработки кожи большие – не более 50 шт.

-Набор №7 нестерильный

Салфетки для обработки кожи малые – не более 50 шт.

-Набор №8 нестерильный

Подстилка впитывающая – не более 10 шт.

-Набор №9 нестерильный

Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

- Набор № 10 нестерильный .

Прокладки для груди – не более 90 шт.

- Набор № 11 нестерильный .

Прокладки впитывающие – не более 90 шт.

-Набор №12 нестерильный .

Трусы гинекологические (послеродовые) – не более 30 шт.

- Набор № 13 нестерильный .

Шорты проктологические – не более 10 шт.

- Набор №14 нестерильный .

Бахилы высокие – не более 10 пар.

-Набор №15 нестерильный .

Рубашка для пациента– не более 10 шт.

- Набор № 16 нестерильный .

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

-Набор №17 нестерильный .

Наволочка – не более 10 шт.

- Набор № 18 нестерильный .

Пододеяльник – не более 10 шт.

-Набор № 19 нестерильный .

Наволочка – не более 10 шт.

Пододеяльник – не более 10 шт.

-Набор № 20 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

- Набор № 21 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

- Набор № 22 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

- Набор № 23 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Простыня большая – не более 10 шт.

- Набор № 24 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

- Набор № 25 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Простыня малая - не более 10 шт.

- Набор № 26 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

-Набор № 27 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

- Набор № 28 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Прокладки впитывающие – не более 40 шт.

Трусы гинекологические (послеродовые) – не более 20 шт.

- Набор №29 нестерильный .

Прокладки впитывающие – не более 40 шт.

Трусы гинекологические (послеродовые) – не более 40 шт.

- Набор №30 нестерильный .

Прокладки впитывающие – не более 20 шт.

Трусы гинекологические (послеродовые) – не более 10 шт.

Прокладки для груди – не более 20 шт.

- Набор № 31 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

- Набор № 32 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Простыня большая - не более 10 шт.

- Набор №33 нестерильный .

Рубашка для пациента – не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

- Набор № 34 нестерильный .

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

- Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

- Набор № 35 нестерильный .

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

- Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

-Набор № 36 нестерильный .

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор № 37 нестерильный .

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

- Набор № 38 нестерильный .

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

- Набор № 39 нестерильный .

Шорты проктологические – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

- Набор №40 нестерильный .

Шорты проктологические – не более 10

Бахилы высокие – не более 10 пар.

- Набор № 41 нестерильный .

Шорты проктологические – не более 10

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Простыня большая – не более 10 шт.

- Набор № 42 нестерильный .

Наволочка – не более 10 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

- Набор №43 нестерильный .

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

- Набор №44 нестерильный .

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

- Набор №45 нестерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

-Набор №46 нестерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

-Набор №47 нестерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

- Набор №48 нестерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

- Набор №49 нестерильный .

Простыня большая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

- Набор №50 нестерильный .

Простыня большая - не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

- Набор №51 нестерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

- Набор №52 нестерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

- Набор №53 нестерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар

- Набор №54 нестерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар

- Набор № 55 нестерильный .

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

- Набор № 56 нестерильный .

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

- Набор № 57 нестерильный .

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

- Набор № 58 нестерильный .

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

- Набор № 59 нестерильный .

Салфетки для обработки кожи большие – не более 30 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

- Набор № 60 нестерильный .

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Рукав для размещения кабелей и шлангов - не более 10 шт.

- Набор № 61 нестерильный .

Наволочка – не более 10 шт.

Пододеяльник – не более 10 шт.

Простыни большие– не более 10 шт.

- Набор № 62 нестерильный .

Простыня большая – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

Простыня с карманом – не более 10 шт.

Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом малая - не более 5 шт.

Салфетки для обработки кожи малые – не более 30 шт.

Пеленка впитывающая – не более 20 шт.

Прокладки для груди – не более 20 пар

Прокладки впитывающие – не более 12 шт.

Трусы гинекологические (послеродовые)– не более 10шт

Бирка для новорожденного – не более 10 шт.

Бахилы высокие – не более 10 пар.

Рубашка для пациента– не более 10 шт.

Головной убор типа «Берет» для пациента – не более 10 шт.

Наволочка – не более 10 шт.

Пододеяльник – не более 10 шт.

- Набор № 63 нестерильный .

Наволочка – не более 10 шт.

Пододеяльник – не более 10 шт.

Простыня малая - не более 10 шт.

- Набор № 64 нестерильный

Простыни малая - не более 10 шт.

Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза – не более 10 шт.

- Набор № 65 нестерильный

Простыни малая - не более 10 шт.

Пеленка впитывающая - не более 10 шт.

- Набор № 66 нестерильный


Пеленка впитывающая – не более 10 шт.

Простыни большие – не более 10 шт.

ОБЩИЙ ВИД МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Рисунок 1. Простыня с липким слоем (большая и малая).

липкий слой 50х3 см

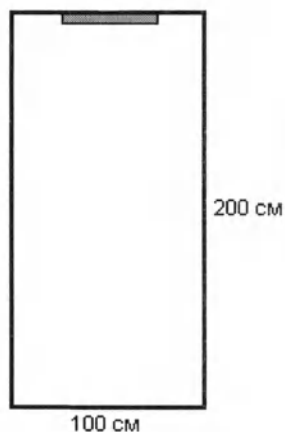

Большая


липкий слой 50х3 см

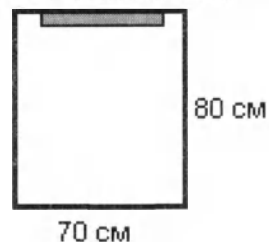

Малая

Рисунок 2. Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом (большая и малая).

140 см

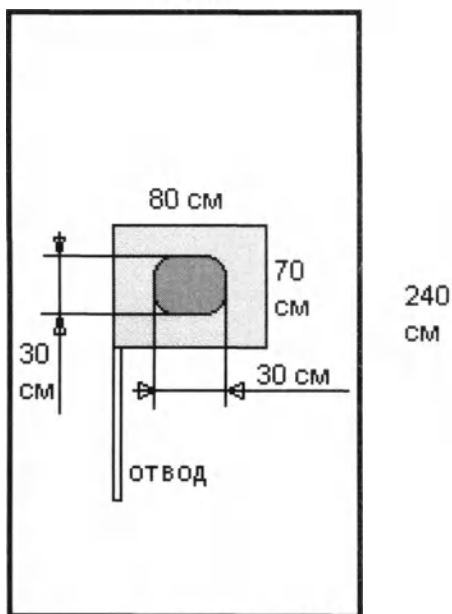

Большая

100 см



Малая

Рисунок 3. Простыня со вставкой из разрезаемой пленки (большая и малая).

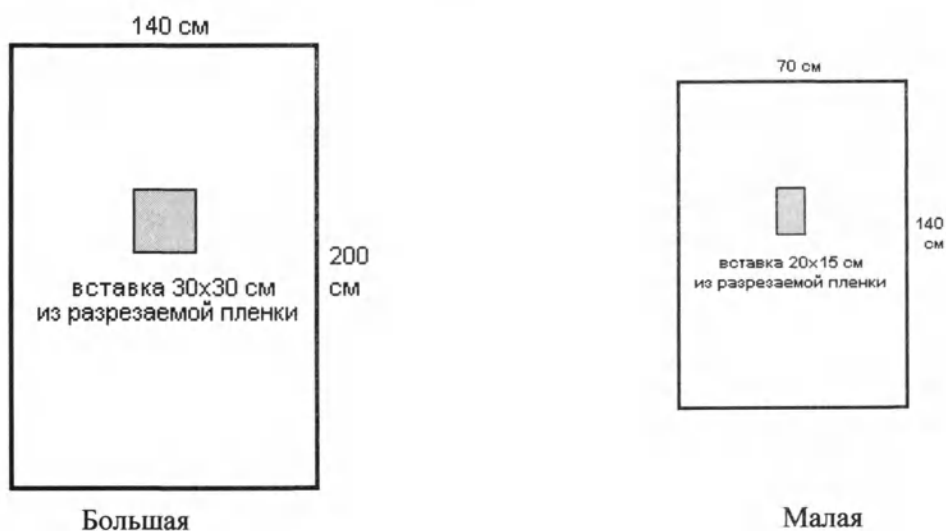


Рисунок 4. Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза.



Рисунок 5. Простыня с прозрачным краем, впитывающей зоной, отверстиями со вставкой из разрезаемой пленки.

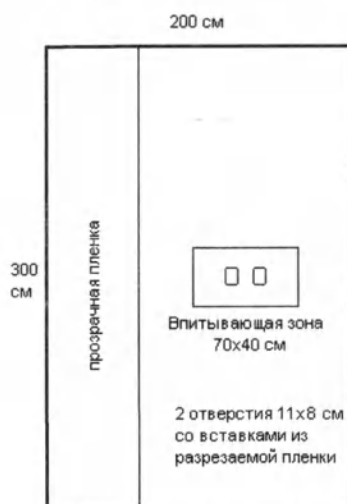


Рисунок 6. Карман с липким краем.

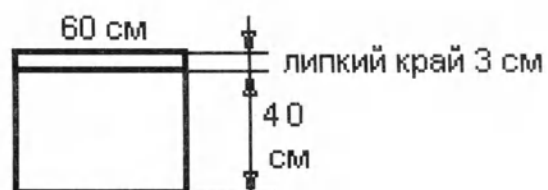


Рисунок 7. Рукав для размещения кабелей и шлангов.

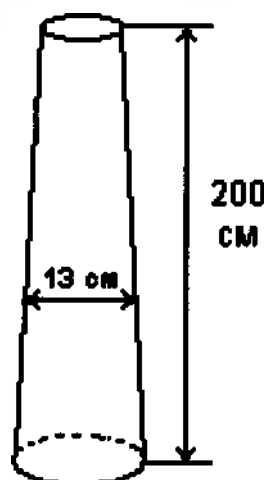


Рисунок 8. Трусы гинекологические (послеродовые), размер 50 – 54.

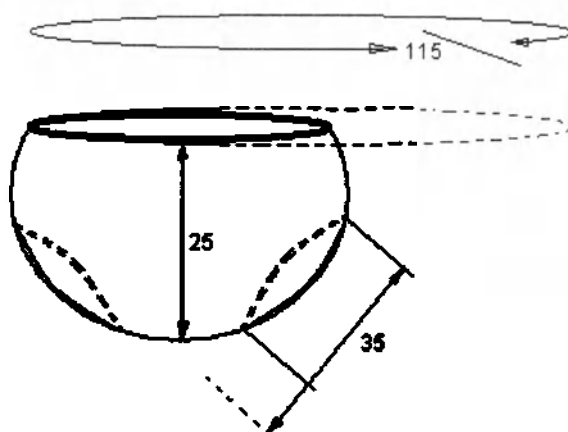


Рисунок 9. Шорты проктологические, размер 48 – 54, рост 170 – 182.

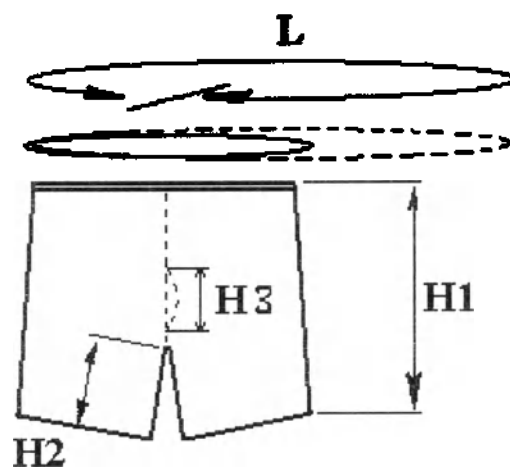


Рисунок 10. Бахилы высокие.

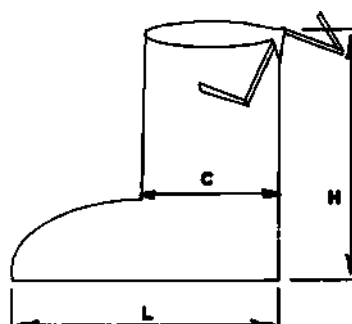


Рисунок 11. Бахилы-леггинсы для пациента.

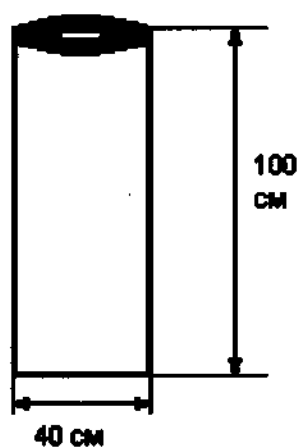


Рисунок 12. Рубашка для пациента, размер 50 – 54, рост 170 – 176.


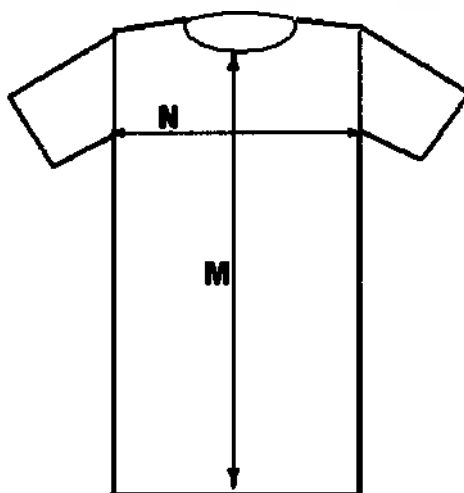


Рисунок 13. Головной убор типа «Берет» для пациента.

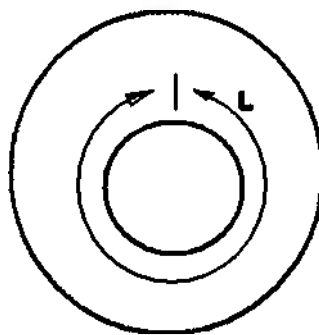

**МАТЕРИАЛЫ И ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ**

Наименование материала	Наименование изделий
Спанбонд (нетканый материал «Медиспан»). Производитель: ООО «Аяском». ТУ 8397-012-51256706-2006.	1. Простыня (большая и малая); 2. Простыня с карманом; 3. Простыня с липким слоем (большая и малая); 4. Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом (большая и малая); 5. Простыня со вставкой из разрезаемой пленки (большая и малая); 6. Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза; 7. Простыня с прозрачным краем, впитывающей зоной, отверстиями со вставкой из разрезаемой пленки; 8. Карман с липким краем; 9. Рукав для размещения кабелей и шлангов; 10. Салфетки для обработки кожи (большая и малая); 11. Мешок санитарный; 12. Чехол на инструментальный стол; 13. Чехол на операционный стол; 14. Трусы гинекологические (послеродовые); 15. Шорты проктологические; 16. Бирка для новорожденного; 17. Бахилы высокие; 18. Бахилы-леггинсы для пациента; 19. Рубашка для пациента; 20. Головной убор типа «Берет» для пациента; 21. Наволочка; 22. Пододеяльник.
СМС (нетканый материал из волокон полипропилена). Соответствует ГН 2.3.3.972-00. Производство: "PEGAS NON-WOVENS s.r.o.", Чехия. или «Медиспан-СМ». Соответствует ГН 2.3.3.972-00; СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Производство: ООО «Аяском». ТУ 8397-012-51256706-2006.	1. Простыня (большая и малая); 2. Простыня с карманом; 3. Простыня с липким слоем (большая и малая); 4. Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом (большая и малая); 5. Простыня со вставкой из разрезаемой пленки (большая и малая); 6. Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза; 7. Простыня с прозрачным краем, впитывающей зоной, отверстиями со вставкой из разрезаемой пленки; 8. Карман с липким краем; 9. Рукав для размещения кабелей и шлангов; 10. Салфетки для обработки кожи (большая и малая); 11. Мешок санитарный; 12. Чехол на инструментальный стол; 13. Чехол на операционный стол; 14. Трусы гинекологические (послеродовые); 15. Шорты проктологические; 16. Бирка для новорожденного; 17. Бахилы высокие; 18. Бахилы-леггинсы для пациента; 19. Рубашка для пациента; 20. Головной убор типа «Берет» для пациента; 21. Наволочка; 22. Пододеяльник.
Спанлейс (нетканый материал). Производитель: ООО «Авангард» ТУ 8390-003-56176857-2007.	1. Простыня (большая и малая); 2. Простыня с карманом; 3. Простыня с липким слоем (большая и малая); 4. Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для

	сбора жидкости, отводом (большая и малая); 5. Простыня со вставкой из разрезаемой пленки (большая и малая); 6. Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза; 7. Простыня с прозрачным краем, впитывающей зоной, отверстиями со вставкой из разрезаемой пленки; 8. Карман с липким краем; 9. Рукав для размещения кабелей и шлангов; 10. Салфетки для обработки кожи (большая и малая); 11. Мешок санитарный; 12. Чехол на инструментальный стол; 13. Чехол на операционный стол; 14. Трусы гинекологические (послеродовые); 15. Шорты проктологические; 16. Бирка для новорожденного; 17. Бахилы высокие; 18. Бахилы-леггинсы для пациента; 19. Рубашка для пациента; 20. Головной убор типа «Берет» для пациента; 21. Наволочка; 22. Пододеяльник.
Айрлайд (нетканый материал). Производитель: ООО «Си-Айрлайд». ТУ 8390-001-13429727-2006.	1. Простыня (большая и малая); 2. Простыня с карманом; 3. Простыня с липким слоем (большая и малая); 4. Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом (большая и малая); 5. Простыня со вставкой из разрезаемой пленки (большая и малая); 6. Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза; 7. Простыня с прозрачным краем, впитывающей зоной, отверстиями со вставкой из разрезаемой пленки; 8. Карман с липким краем; 9. Рукав для размещения кабелей и шлангов; 10. Салфетки для обработки кожи (большая и малая); 11. Мешок санитарный; 12. Чехол на инструментальный стол; 13. Чехол на операционный стол; 14. Трусы гинекологические (послеродовые); 15. Шорты проктологические; 16. Бирка для новорожденного; 17. Бахилы высокие; 18. Бахилы-леггинсы для пациента; 19. Рубашка для пациента; 20. Головной убор типа «Берет» для пациента; 21. Наволочка; 22. Пододеяльник.
Нетканый материал вуденпалп. Производитель: SNA TRADE GROUP LTD, США. Соответствует МУ 1.1.037-95.	1. Простыня (большая и малая); 2. Простыня с карманом; 3. Простыня с липким слоем (большая и малая); 4. Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом (большая и малая); 5. Простыня со вставкой из разрезаемой пленки (большая и малая); 6. Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза; 7. Простыня с прозрачным краем, впитывающей зоной, отверстиями со вставкой из разрезаемой пленки; 8. Карман с липким краем; 9. Рукав для размещения кабелей и шлангов; 10. Салфетки для обработки кожи (большая и малая);

	11. Мешок санитарный; 12. Чехол на инструментальный стол; 13. Чехол на операционный стол; 14. Трусы гинекологические (послеродовые); 15. Шорты проктологические; 16. Бирка для новорожденного; 17. Бахилы высокие; 18. Бахилы-леггинсы для пациента; 19. Рубашка для пациента; 20. Головной убор типа «Берет» для пациента; 21. Наволочка; 22. Пододеяльник.
Нетканая ламинированная пленка Производитель: "Shaoxing Fuqing Health Products Co.", Китай. СЭЗ №77.01.16.224.П.059367.09.06. или Айрлайд ламинированный. Производитель: ООО «Си-Айрлайд». ТУ 8390-001-13429727-2003.	1. Простыня (большая и малая); 2. Простыня с карманом; 3. Простыня с липким слоем (большая и малая); 4. Простыня с отверстием, липким слоем, карманом для сбора жидкости, отводом (большая и малая); 5. Простыня со вставкой из разрезаемой пленки (большая и малая); 6. Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза; 7. Простыня с прозрачным краем, впитывающей зоной, отверстиями со вставкой из разрезаемой пленки; 8. Карман с липким краем; 9. Рукав для размещения кабелей и шлангов; 10. Мешок санитарный; 11. Чехол на инструментальный стол; 12. Чехол на операционный стол; 13. Шорты проктологические; 14. Бирка для новорожденного; 15. Бахилы высокие; 16. Бахилы-леггинсы для пациента; 17. Рубашка для пациента.
Пленка полиэтиленовая. Производитель: ООО «Пласт-упаковка». ГОСТ 10354-82.	1. Карман с липким краем; 2. Рукав для размещения кабелей и шлангов; 3. Мешок санитарный; 4. Элемент изделий (карман, прозрачный край и т.п.).
Покупные изделия:	
Простыни медицинские. Производитель: ОАО «Конд-ровская бумажная Компания». ТУ 9393-030-00278959-96.	1. Простыня (большая и малая); 2. Простыня с липким слоем (большая и малая); 3. Простыня со вставкой из разрезаемой пленки (большая и малая); 4. Простыня с вырезом, с липким слоем по краю выреза; 5. Карман с липким краем; 6. Чехол на инструментальный стол; 7. Чехол на операционный стол.
Простыни впитывающие для страдающих недержанием «TENA». Производитель: SCA Hygiene Products Geppner B.V., Нидерланды. РУ ФСЗ 2009/04690	Подстилка впитывающая. Пеленка впитывающая.
Изделия гигиенические женские одноразовые «Хелен Харпер» (Helen Harper) для предродового и послеродового периодов: Прокладки на грудь мягкие для кормящих матерей «Хелен Харпер» (Helen Harper Bra Pads). РУ № ФСЗ 2008/00080	Прокладки для груди.

Прокладки впитывающие для страдающих недержанием "ТЕНА Леди мини, нормал, экстра, супер" (TENA Lady mini, normal, extra, super) Производитель: SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., Нидерланды. РУ ФСЗ 2008/01219	Прокладка впитывающая.
Пленка липкая операционная «Эмакрил». Производитель: ООО «Группа компаний Пальма». ТУ 9398-004-17168608-2004. РУ № ФСР 2008/01722.	Пленка разрезаемая (самостоятельное изделие, либо элемент).
Бинт липкий на полотне нетканом прокладочном для фиксации повязок и других хирургических изделий медицинского назначения «Бинтли». Производитель: ООО «Группа компаний Пальма». ТУ 9393-008-17168608-2004. РУ №ФСР 2008/01721.	Клейкая лента (элемент).



отправлено
и отправлено
через
382