



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING



Адамов А.В.

Генеральный директор ООО «Харц Лабс»

ион

2020.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров
по НТРЦ.942829.001ТУ**

1. Наименование МИ:

Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ, варианты исполнения:

1. Dental Bleach (емкость: 500 г, 1000 г), модели:
 - Dental Bleach
 - Dental Bleach Form2
 - Dental Bleach PRO
2. Dental Yellow Clear (емкость: 500 г, 1000 г), модели:
 - Dental Yellow Clear
 - Dental Yellow Clear Form2
 - Dental Yellow Clear PRO
3. Dental Clear (емкость: 500 г, 1000 г), модели:
 - Dental Clear
 - Dental Clear Form2
 - Dental Clear PRO
4. Dental Peach (емкость: 500 г, 1000 г), модели:
 - Dental Peach
 - Dental Peach Form2
 - Dental Peach PRO
5. Dental Sand A1-A2 (емкость: 500 г, 1000 г), модели:
 - Dental Sand A1-A2
 - Dental Sand A1-A2 Form2
 - Dental Sand A1-A2 PRO
6. Dental Sand A3 (емкость: 500 г, 1000 г), модели:
 - Dental Sand A3
 - Dental Sand A3 Form2
 - Dental Sand A3 PRO
7. Dental Pink (емкость: 500 г, 1000 г), модели:
 - Dental Pink
 - Dental Pink Form2
 - Dental Pink PRO
8. Dental Pink Soft (емкость: 500 г, 1000 г), модели:
 - Dental Pink Soft
 - Dental Pink Soft Form2
 - Dental Pink Soft PRO
9. Dental RO (емкость: 500 г, 1000 г), модели:
 - Dental RO
 - Dental RO Form2
 - Dental RO PRO
10. Dental Cast Red (емкость: 500 г, 1000 г), модели:
 - Dental Cast Cherry
 - Dental Cast Cherry Form2
 - Dental Cast Cherry PRO

2. Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»

123458, г Москва, ул.Твардовского 8с1, пом. I ком. 9.

Место производства: 141001, Московская область, г Мытищи, ул. Силикатная 51 А, стр.5

3. Назначение:

Для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости

Область применения:

Стоматология

4. Показания к применению:

Изготовление зубных реставраций

5. Противопоказания:

Отсутствуют.

6. Побочные действия:

Не обнаружены

7. Основные характеристики*:

Тип	Модель	Масса нетто
Dental Bleach	Dental Bleach	500 г
		1000 г
	Dental Bleach Form2	500 г
		1000 г
	Dental Bleach PRO	500 г
		1000 г
Dental Cast Red	Dental Cast Cherry	500 г
		1000 г
	Dental Cast Cherry Form2	500 г
		1000 г
	Dental Cast Cherry PRO	500 г
		1000 г
Dental Clear	Dental Clear	500 г
		1000 г
	Dental Clear Form2	500 г
		1000 г
	Dental Clear PRO	500 г
		1000 г
Dental Peach	Dental Peach	500 г
		1000 г
	Dental Peach Form2	500 г
		1000 г
	Dental Peach PRO	500 г
		1000 г
Dental Pink	Dental Pink	500 г

Тип	Модель	Масса нетто
	Dental Pink Form2	1000 г
		500 г
		1000 г
	Dental Pink PRO	500 г
		1000 г
Dental Pink Soft	Dental Pink Soft	500 г
		1000 г
	Dental Pink Soft Form2	500 г
		1000 г
	Dental Pink Soft PRO	500 г
		1000 г
Dental RO	Dental RO	500 г
		1000 г
	Dental RO Form2	500 г
		1000 г
	Dental RO PRO	500 г
		1000 г
Dental Sand A1-A2	Dental Sand A1-A2	500 г
		1000 г
	Dental Sand A1-A2 Form2	500 г
		1000 г
	Dental Sand A1-A2 PRO	500 г
		1000 г
Dental Sand A3	Dental Sand A3	500 г
		1000 г
	Dental Sand A3 Form2	500 г
		1000 г
	Dental Sand A3 PRO	500 г
		1000 г
Dental Yellow Clear	Dental Yellow Clear	500 г
		1000 г
	Dental Yellow Clear Form2	500 г
		1000 г
	Dental Yellow Clear PRO	500 г
		1000 г

**См. также спецификацию, паспорт безопасности и этикетку*

8. Условия эксплуатации:

Применяется в условиях зуботехнической лаборатории.

9. Условия транспортировки и хранения:

Транспортировка изделия должна осуществляться при следующих климатических условиях: температура от плюс 5 до плюс 30 °С, влажность не более 75 %, атмосферное давление от 60 до 105 кПа

Хранение изделие должно осуществляться при следующих климатических условиях: температура от плюс 5 до плюс 30 °С, влажность не более 75 %, атмосферное давление от 60 до 105 кПа, в отсутствии солнечного света.

10. Метод дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации:

Перед применением готовое изделие подвергнуть циклу обработки, состоящему из промывки проточной питьевой водой перед дезинфекцией, дезинфекции, промывки проточной питьевой водой по окончании дезинфекционной выдержки. Дезинфекция должна проводиться химическим методом средством МД-520 ("Дюрр-Денталь Орохим", Германия) без разведения в течение 10 минут.

11. Маркировка:

Потребительская упаковка должна иметь чёткую маркировку, содержащую:

- наименование изделия;
- номинальную массу;
- номинальный объём;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- срок годности (в формате ММ.ГГГГ);
- номер партии;
- состав материала;
- меры предосторожности при обращении с Материалом;
- описание Материала;
- способ применения Материала;
- знаки «температурный диапазон хранения» и «беречь от солнечных лучей».

Транспортная маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 и содержать следующие манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь от влаги».

12. Упаковка

Упаковка должна обеспечивать защиту Материала от внешних воздействий при транспортировании и хранении.

В качестве тары применяют непрозрачные бутылки из полиэтилена низкого давления по ГОСТ 16338 (ПНД), окрашенного в массу техуглеродом марки К-354, емкостью 0,5 и 1 л. Крышка также состоит из этого материала. Во избежание протечек горло бутылки запаяно двухкомпонентным вкладышем из алюминиевой фольги с помощью индукционного запайщика.

Количество упакованных бутылок в транспортную тару и ее конструкцию определяет изготовитель.

В транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором должны быть указаны:

- наименование изделия;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- количество изделий в упаковке;
- дата упаковывания.

13. Утилизация:

Изделия подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на момент утилизации.

Отходы относятся к классу Г - токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности и требуют специальных мер предосторожности при уничтожении (утилизации) их согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

14. Гарантийные обязательства:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования

Приложение 1. Этикетки


Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

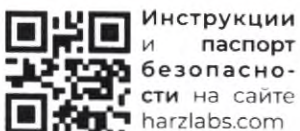

Инструкции
и паспорт
безопасности на сайте
harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
BLEACH**

**DENTAL
BLEACH**

Хранить вдали от прямых
солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

белый

RU **Материал для
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ
Dental Bleach 1000г.**
предназначен для
дентального моделиро-
вания посредством
3D-печати лазерной
стереолитографии и
отвердеваемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документа-
цией. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:
применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории

Годен до и номер партии




Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

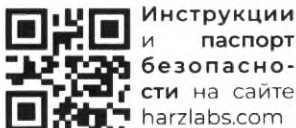

Инструкции
и паспорт
безопасности на сайте
harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
BLEACH**

FORM2

**DENTAL
BLEACH**

FORM2

Хранить вдали от прямых
солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

белый

RU **Материал для
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ
Dental Bleach Form2
1000г.** предназначен
для дентального моде-
лирования посред-
ством 3D-печати лазер-
ной стереолитографии
и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документа-
цией. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:
применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com



Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
BLEACH**

PRO



1кг

**DENTAL
BLEACH**

PRO

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

белый

RU
Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ
Dental Bleach PRO 1000 г. предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com




Инструкции
и паспорт
безопасности
на сайте
harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

DENTAL CAST

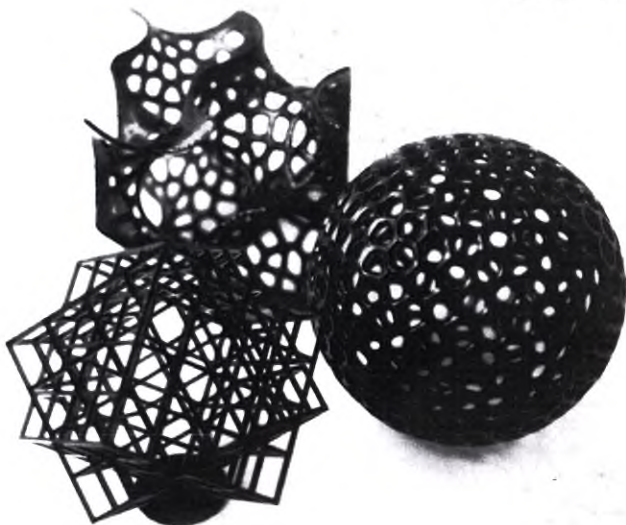

Хранить вдали от прямых
солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

DENTAL
CAST

RU Материал для
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ
Dental Cast Red 1000r.

предназначен для
дентального моделиро-
вания посредством
3D-печати лазерной
стереолитографии и
отверждаемости

Способ применения:

Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документаци-
ей. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:
применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории



Подписывайтесь на
fb.com/HARZlabs


Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав: Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:
ООО «ХАРЗ Лабс», 123458,
Россия, Москва, ул.
Твардовского 8 с.1
harzlabs.com

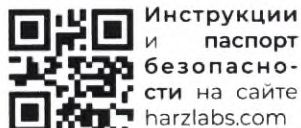


Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
CAST**

PRO

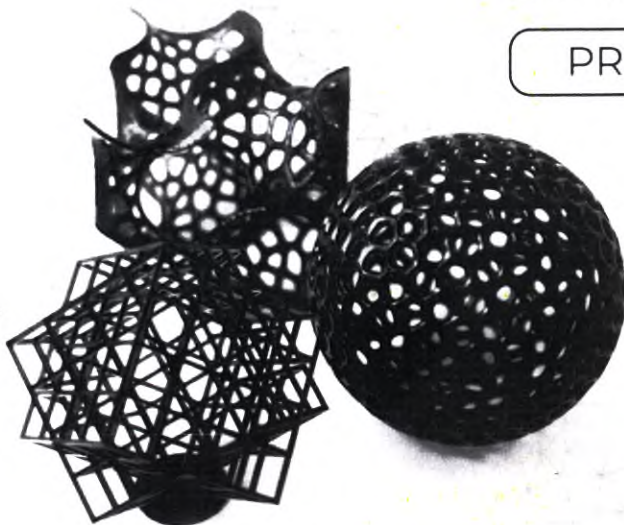

**DENTAL
CAST**

PRO

Хранить вдали от прямых
солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

вишнёвый

RU **Материал для
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ
Dental Cast Red PRO
1000г.** предназначен
для дентального моде-
лирования посред-
ством 3D-печати лазер-
ной стереолитографии
и отверждаемости

Способ применения:
Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документа-
цией. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:
применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории

f Подписывайтесь на
fb.com/HARZlabs

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:
Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:
ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com

 **Инструкции и паспорт безопасности** на сайте harzlabs.com


Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

DENTAL
CAST

FORM2

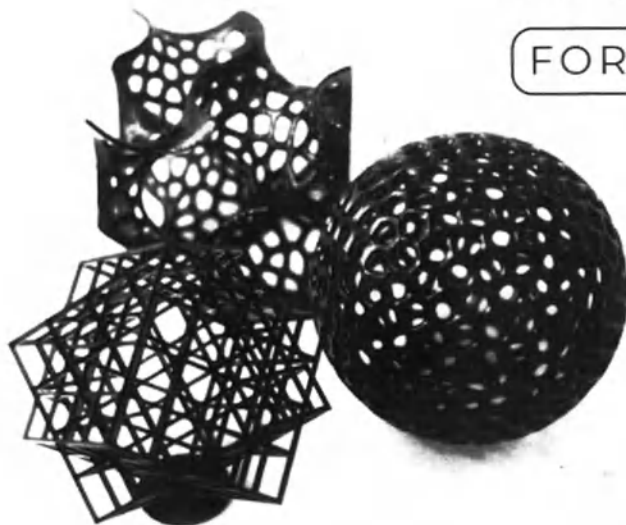

DENTAL
CAST

FORM2

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

ишнёвы

RU **Материал для**
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ
Dental Cast Red Form2
1000г. предназначен
для дентального моде-
лирования посред-
ством 3D-печати лазер-
ной стереолитографии
и отверждаемости

Способ применения:
Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документа-
цией. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:
применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории

 Подписывайтесь на
fb.com/HARZlabs

Годен до и номер партии



4 603740 518222

Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав: Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор.

Производитель:
ООО «ХАРЦ Лабс», 123458,
Россия, Москва, ул.
Твардовского 8 с.1
harzlabs.com

 **Инструкции и паспорт безопасности** на сайте
harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

DENTAL
CLEAR



DENTAL
CLEAR

Хранить вдали от прямых
солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

прозрачный

RU **Материал для
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ
Dental Clear 1000g.**
предназначен для
дентального моделиро-
вания посредством
3D-печати лазерной
стереолитографии и
отвердеваемости.

Способ применения:
Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документа-
цией. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:
применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

 **Инструкции и паспорт безопасности** на сайте harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

DENTAL
CLEAR

FORM2



DENTAL
CLEAR

FORM2

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

прозрачный

RU **Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Clear Form2 1000 г.** предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

 **Инструкции и паспорт безопасности** на сайте harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

DENTAL
CLEAR

PRO



1кг

DENTAL
CLEAR

PRO

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

прозрачный

RU **Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Clear PRO 1000г.** предназначен для дентального моделирования посредством лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com




Инструкции и паспорт безопасности на сайте
harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

DENTAL
PEACH

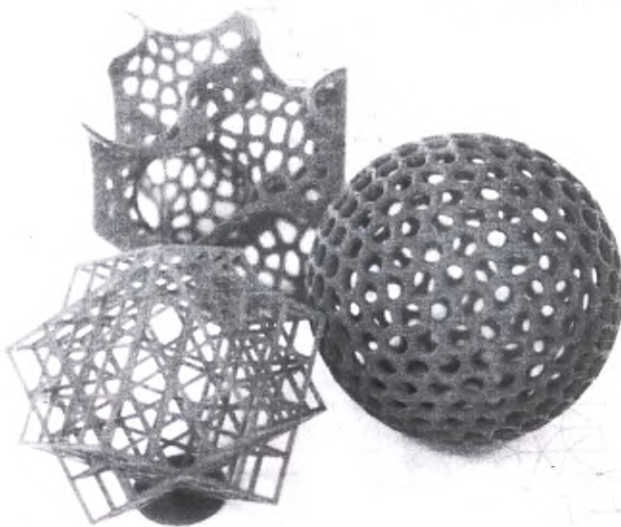

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

персиковый

RU
Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Peach 1000г. предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отвердеваемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии




Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

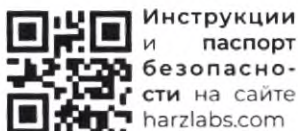

Инструкции и паспорт безопасности на сайте harzlabs.com


Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
PEACH**

FORM2

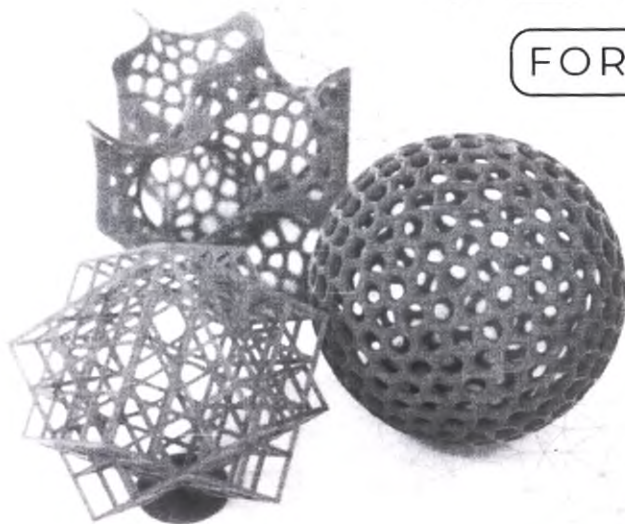

**DENTAL
PEACH**

FORM2

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

персиковый

RU **Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Peach 1000г.** предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации:

применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com



Инструкции и паспорт безопасности на сайте harzlabs.com


Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
PEACH**

PRO

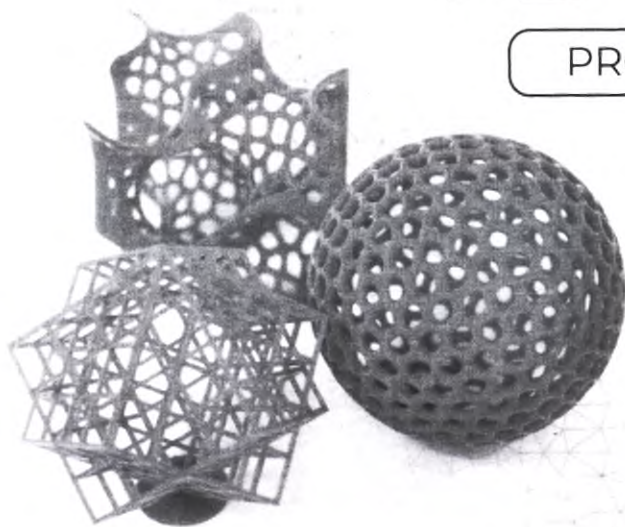

**DENTAL
PEACH**

PRO

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

персиковый

RU **Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Peach 1000г.** предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отвердеваемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:
Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:
ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com


 **Инструкции и паспорт безопасности** на сайте harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
PINK**

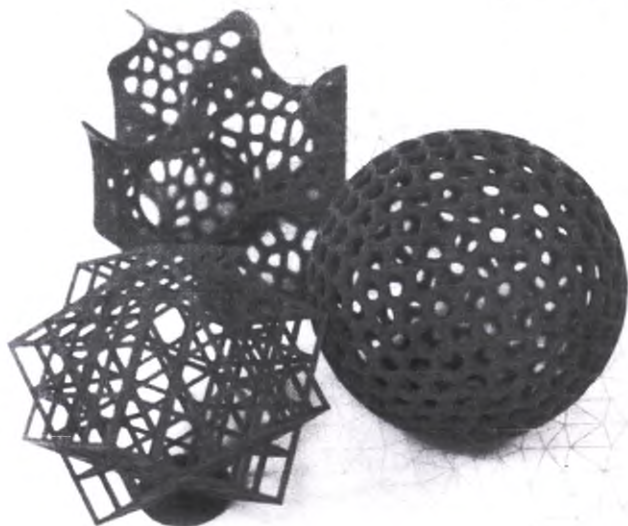

1кг

**DENTAL
PINK**

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

розовый

RU **Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров**
НТРЦ.942829.001ТУ по Dental Pink 1000г. предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отвердевает.

Способ применения:
Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации:
применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com




Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
PINK**

FORM2

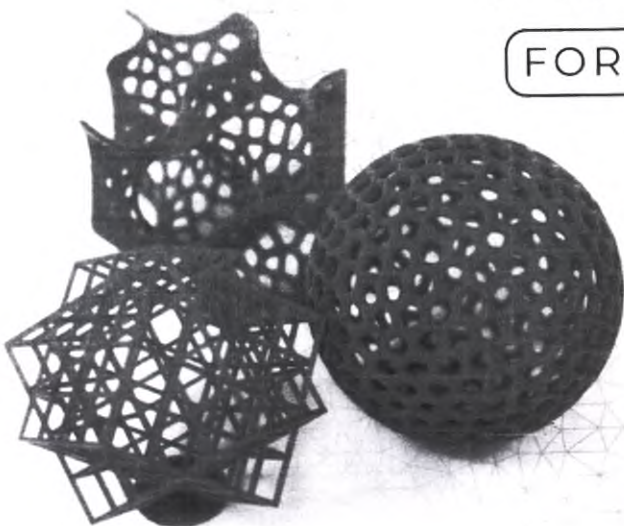

**DENTAL
PINK**

FORM2

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

розовый

RU Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Pink Form2 1000 г. предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории


Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав: Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:
ООО «ХАРЦ Лабс», 123458,
Россия, Москва, ул.
Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

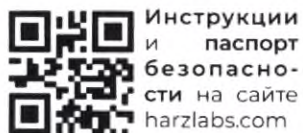


Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

DENTAL
PINK

PRO

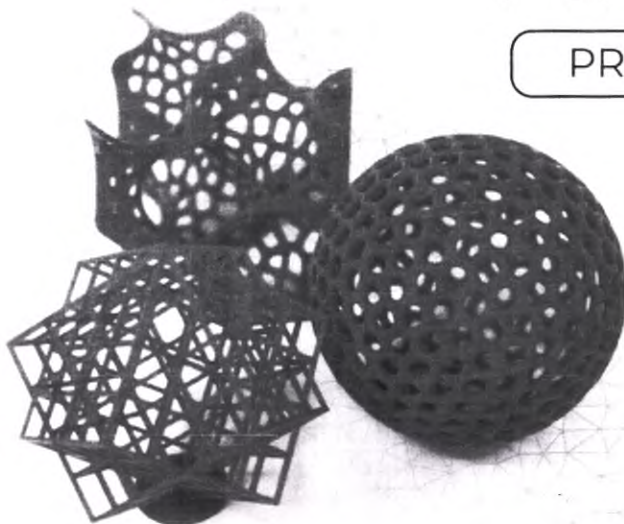

DENTAL
PINK

PRO

Хранить вдали от прямых
солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

розовый

RU Материал для
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ
Dental Pink PRO 1000г.
предназначен для
дентального моделиро-
вания посредством
3D-печати лазерной
стереолитографии и
отверждаемости.

Способ применения:
Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документа-
цией. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:
применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожно-

сти: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, сульфат бария.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com



**Инструкции
и паспорт
безопасно-
сти** на сайте
harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

DENTAL
RO

DENTAL
RO

Хранить вдали от прямых
солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

белый

RU

**Материал для
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ
Dental RO 1000г.** пред-
назначен для денталь-
ного моделирования
посредством 3D-печати
лазерной стереолито-
графии и отверждае-
мости.

Способ применения:

Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документа-
цией. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:

применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, сульфат бария.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com



Инструкции и паспорт безопасности на сайте
harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

DENTAL
RO

FORM2

DENTAL
RO

FORM2

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

белый

RU Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental RO Form2 1000г. предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Влейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, сульфат бария.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

 **Инструкции и паспорт безопасности** на сайте harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

DENTAL
RO

PRO

DENTAL
RO

PRO

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000g / 940мл

1кг

белый

RU **Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental RO PRO 1000g.** предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com




Инструкции и паспорт безопасности на сайте harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
SAND A1-A2**

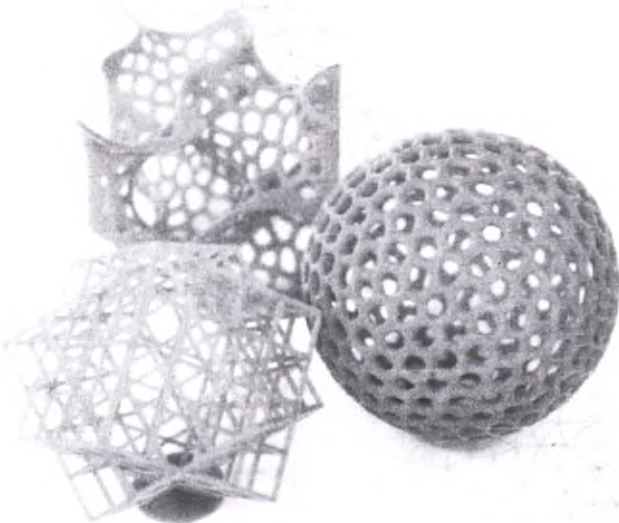

1кг

**DENTAL
SAND A1-A2**

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

**песочный
A1-A2**

RU **Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Sand A1-A2 1000г.** предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годеи до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

 **Инструкции и паспорт безопасности** на сайте harzlabs.com


Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
SAND A1-A2**

FORM2

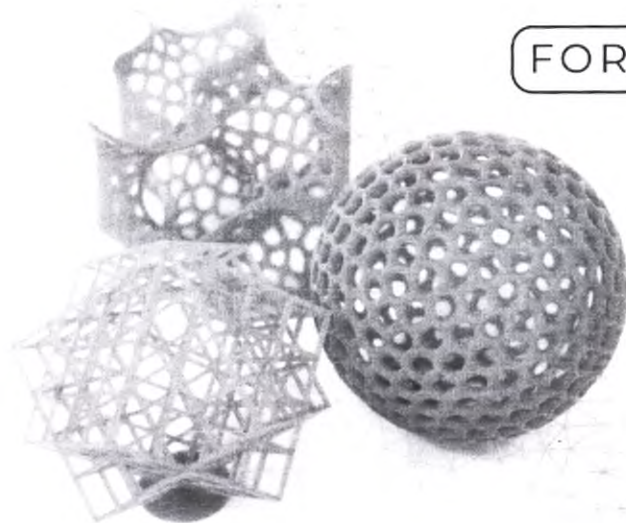

**DENTAL
SAND A1-A2**

FORM2

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

**песочный
A1-A2**



RU **Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Sand A1-A2 Form2 1000г.** предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отвердеваемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com



Инструкции
и паспорт
безопасности на сайте
harzlabs.com


Номер PV и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
SAND A1-A2**

PRO

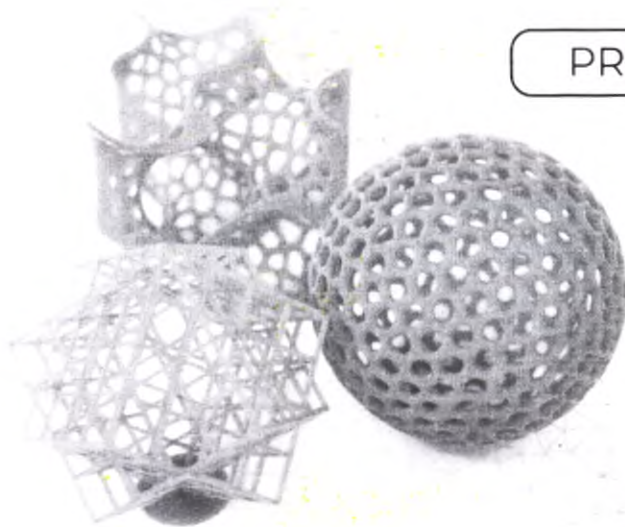

**DENTAL
SAND A1-A2**

PRO

Хранить вдали от прямых
солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

**песочный
A1-A2**

RU **Материал для
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ
Dental Sand A1-A2 PRO
1000г.** предназначен
для дентального моде-
лирования посред-
ством 3D-печати лазер-
ной стереолитографии
и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документа-
цией. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:
применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории

Годен до и номер партии




Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

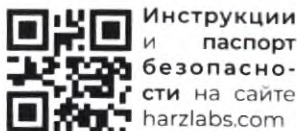


Инструкции
и паспорт
безопасности
на сайте
harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
SAND A3**

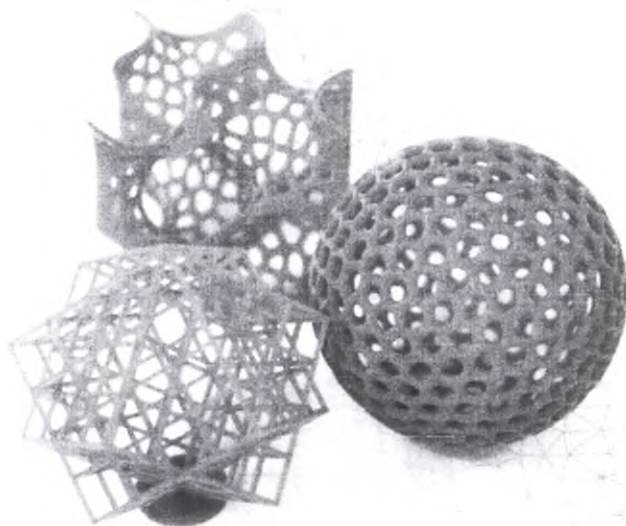

**DENTAL
SAND A3**

Хранить вдали от прямых
солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

**песочный
A3**

RU Материал для
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ
Dental Sand A3 1000г.
предназначен для
дентального моделиро-
вания посредством
3D-печати лазерной
стереолитографии и
отвердеваемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документа-
цией. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:
применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com



Инструкции и паспорт безопасности на сайте harzlabs.com


Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

DENTAL
SAND A3

FORM2

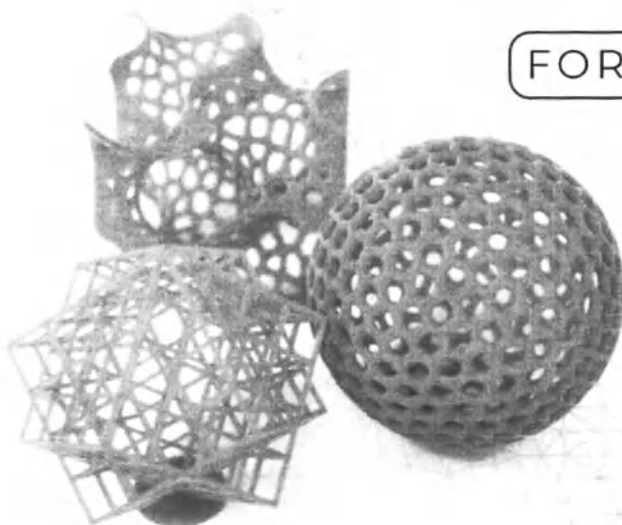

DENTAL
SAND A3

FORM2

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

песочный
A3

RU **Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Sand A3 FORM2 1000г.** предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории


Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:
Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:
ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

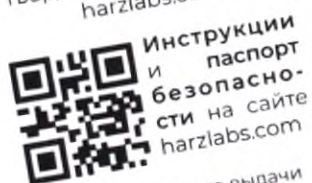

Инструкции и паспорт безопасности на сайте
harzlabs.com


Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
SAND A3**

PRO

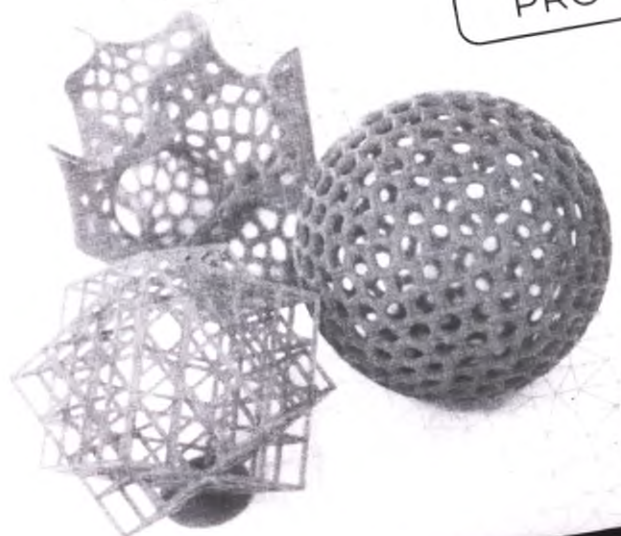

1кг

**DENTAL
SAND A3**

PRO

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

песочный
A3

Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Sand A3 PRO 1000г. предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации:
применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:
Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор.

Производитель:
ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

 **Инструкции и паспорт безопасности** на сайте harzlabs.com

Номер ру и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
YELLOW
CLEAR**



**DENTAL
YELLOW
CLEAR**

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг
желтый
прозрачный

Материал для
дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Yellow Clear 1000 г. предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отвердеваемости.
Способ применения:
Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.
Условия эксплуатации:
применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com



Инструкции и паспорт безопасности на сайте harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
YELLOW
CLEAR**

FORM2



1кг

**DENTAL
YELLOW
CLEAR**

FORM2

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

желтый
прозрачный

RU
Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Dental Yellow Clear Form2 1000г. предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации:

применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии




Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с. 1
harzlabs.com

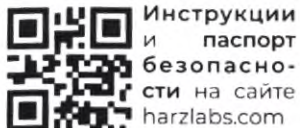

Инструкции
и паспорт
безопасности на сайте
harzlabs.com

Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

**DENTAL
YELLOW
CLEAR**

PRO



1кг

**DENTAL
YELLOW
CLEAR**

PRO

Хранить вдали от прямых
солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

желтый
прозрачный

RU Материал для
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ
Dental Yellow Clear PRO
1000г. предназначен
для дентального моде-
лирования посред-
ством 3D-печати лазер-
ной стереолитографии
и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документа-
цией. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:
применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории

Годен до и номер партии



4 603740 518260


Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор, пигменты.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com

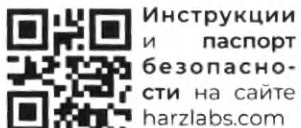


Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

SOFT
PINK

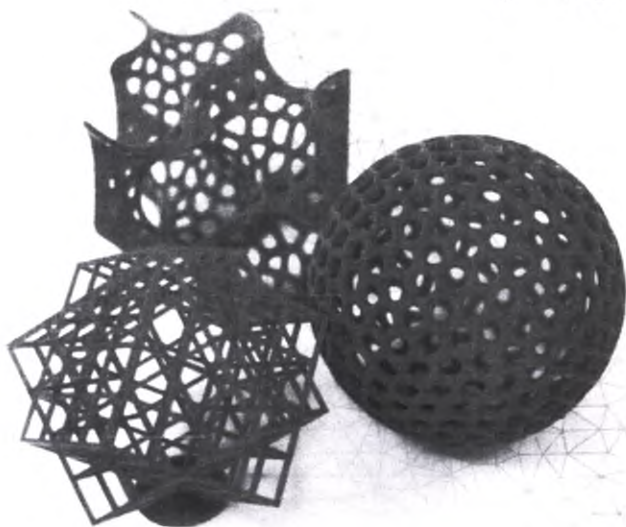

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

розовый

RU
Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров по НТРЦ.942829.001ТУ Soft Pink 1000г. предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отверждаемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:

Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор.

Производитель:

ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com



Инструкции и паспорт безопасности на сайте harzlabs.com


Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

SOFT
PINK

FORM2

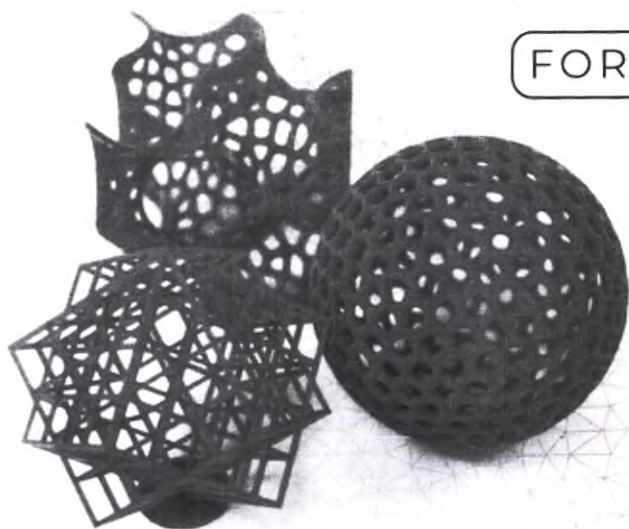

1кг

SOFT
PINK

FORM2

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

розовый

RU **Материал для дентального моделирования посредством 3D-печати на основе полимеров** по НТРЦ.942829.001ТУ Soft Pink Form2 1000г. предназначен для дентального моделирования посредством 3D-печати лазерной стереолитографии и отвердеваемости.

Способ применения:

Встряхните бутылку перед использованием. Влейте смолу в ванну принтера. Готовые модели обработать в соответствии с эксплуатационной документацией. Для полной полимеризации проводят постотверждение в УФ камере.

Условия эксплуатации: применяется в условиях зуботехнической лаборатории

Годен до и номер партии



Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта промыть большим количеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Состав:
Метакриловые мономеры, метакриловые олигомеры, фотоинициатор.


Производитель:
ООО «ХАРЦ Лабс», 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского 8 с.1
harzlabs.com



Номер РУ и дата выдачи



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

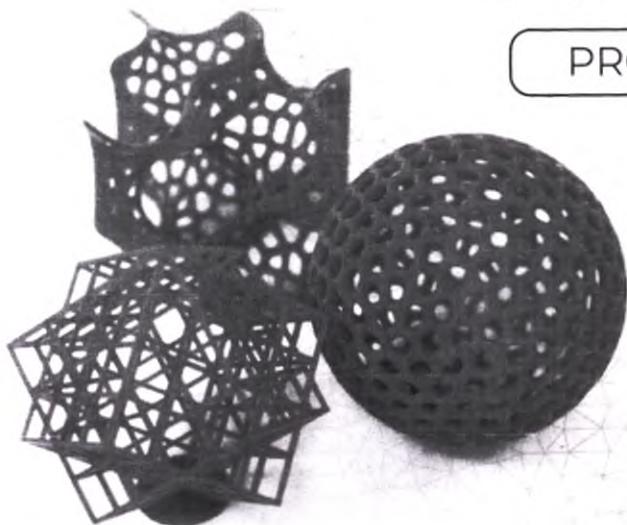

**SOFT
PINK**

PRO

**SOFT
PINK**

PRO

Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Встряхнуть перед использованием

1000г / 940мл

1кг

розовый

RU Материал для
дентального модели-
рования посредством
3D-печати на основе
полимеров по
НТРЦ.942829.001ТУ Soft
Pink PRO 1000г. предна-
значен для дентального
моделирования
посредством 3D-печати
лазерной стереолито-
графии и отвердевае-
мости.

Способ применения:
Встряхните бутылку
перед использованием.
Вылейте смолу в ванну
принтера. Готовые
модели обработать в
соответствии с эксплуа-
тационной документа-
цией. Для полной поли-
меризации проводят
постотверждение в УФ
камере.

Условия эксплуатации:
применяется в услови-
ях зуботехнической
лаборатории

Годен до и номер партии



Приложение 2. Спецификации материала



HARZ labs

Harz Labs Dental Cast Form2 resin

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта

Harz Labs Dental Cast Form2 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати моделей на стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 385-405нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Вишневый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

Использовать для литья по выжигаемым моделям в стоматологических формомассах.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ Labs

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Cast PRO resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати моделей на промышленных стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-365нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Вишневый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

Использовать для литья по выжигаемым моделям в стоматологических формомассах.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Cast resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати моделей на стереолитографических 3D принтерах LCD/DLP типа с длиной волны 385-420нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Вишневый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

Использовать для литья по выжигаемым моделям в стоматологических формомассах.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.



12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта

Harz Labs Dental RO Form2 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати рентгеноконтрастных капп и шаблонов на стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 385-405нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Белый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.



12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental RO PRO resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати рентгеноконтрастных кап и шаблонов на промышленных стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-365нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Белый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental RO resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати рентгеноконтрастных капп и шаблонов на стереолитографических 3D принтерах LCD/DLP типа с длиной волны 385-420нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Белый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ Labs

Harz Labs Dental Clear resin

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Clear resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати хирургических шаблонов, кап и элайнеров на стереолитографических 3D принтерах LCD/DLP типа с длиной волны 385-420нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный, желтоватый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

Harz Labs Dental Clear Form2 resin

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Clear Form2 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати хирургических шаблонов, кап и элайнеров на стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 385-405нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный, желтоватый
Запах	Слабо выраженный
Вязкость по Брукфильду	0.8-1 СПз
Содержание нелетучих компонентов	100%
Полимеризационная усадка	Менее 0,5%
Предел прочности на разрыв (готовое изделие)	65- 85 N/mm2
Удлинение при разрыве (готовое изделие)	4-6%
Твердость по Шору D (готовое изделие)	85-92 D

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

Material Science & Technology

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Clear PRO resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати хирургических шаблонов, капп и элайнеров на промышленных стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-405 нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный, желтоватый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Peach resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров,

2. Применение:

Предназначен для печати демонстрационных моделей и мастер-моделей под термоформовку на стереолитографических 3D принтерах LCD/DLP типа с длиной волны 385-420нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Персиковый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Peach PRO resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров,

2. Применение:

Предназначен для печати демонстрационных моделей и мастер-моделей под термоформовку на промышленных стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-365нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Персиковый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

Harz Labs Dental Form2 resin

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Peach Form2 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати демонстрационных моделей и мастер-моделей под термостатом на стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 365-405нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Персиковый
Запах	Слабо выраженный
Вязкость по Брукфильду	1,1-1,4 СПз
Содержание нелетучих компонентов	100%
Полимеризационная усадка	Менее 0,5%
Предел прочности на разрыв (готовое изделие)	65- 85 N/mm2
Удлинение при разрыве (готовое изделие)	4-6%
Твердость по Шору D (готовое изделие)	85-92 D

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

LABORATORIES FOR SUSTAINABLE

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых
солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.
Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs
Materials for 3D printing

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Pink Form2 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати базиса временного протеза на стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 385-405нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Цвет	Розовый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

harz labs

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Pink PRO resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати базиса временного протеза на промышленных стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-365нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Цвет	Розовый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Pink resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати базиса временного протеза на стереолитографических 3D принтерах LCD/DLP типа с длиной волны 385-420нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Цвет	Розовый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

Материалы для стоматологии

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Bleach PRO resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров.

2. Применение:

Предназначен для печати временных коронок и мостов белого цвета на промышленных стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-405 нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Цвет	Белый
Запах	Слабо выраженный
Вязкость по Брукфильду	0.8-1 спз
Содержание нелетучих компонентов	100%
Полимеризационная усадка	Менее 0,5%
Предел прочности на разрыв (готовое изделие)	65- 85 N/mm ²
Удлинение при разрыве (готовое изделие)	4-6%
Твердость по Шору D (готовое изделие)	85-92 d

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00

labs

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ответственность «ХАРЦ Лабс»
ИНН • ОГРН 5177746037728

сертификация продукта Harz Dental Bleach PRO resin

стоматологический на основе полимеров.

для изготовления временных коронок и мостов белого цвета на
цифровых 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-

характеристики

	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Цвет	Белый
Запах	Слабо выраженный
Вязкость	0.8-1 спз
Содержание инициатора	100%
Содержание ингибитора	Менее 0,5%
Прочность (готовое изделие)	65- 85 N/mm2
Водопоглощение (готовое изделие)	4-6%
Износостойкость (готовое изделие)	85-92 d

инструкция к применению

использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После
погружения в этиловый или изопропиловый спирт. Полная
полимеризация в УФ камере.
Хранить в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте
респираторы. Избегать контакта с кожей и слизистой

7751087784
775101001
ИНН • ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00

Классификация продукта harz Dental Bleach PRO resin

Белый стоматологический на основе полимеров.

Для временных коронок и мостов белого цвета на
цифровых 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-

Характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Цвет	Белый
Запах	Слабо выраженный
Вязкость	0.8-1 спз
Содержание компонентов	100%
Содержание ингибитора	Менее 0,5%
Ударная вязкость (готовое изделие)	65- 85 N/mm2
Износостойкость (готовое изделие)	4-6%
Твердость (готовое изделие)	85-92 d

Инструкция к применению

Перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После
использования промыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная
полимеризация происходит в УФ камере.
Хранить в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте
средства защиты органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой



12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых
ультрафиолетовых лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.
Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

Made with 3D printing

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Bleach resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати временных коронок и мостов белого цвета на стереолитографических 3D принтерах LCD/DLP типа с длиной волны 385-420нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	полупрозрачная жидкость
Цвет	Белый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8
Тел: +7 495 291 02



12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта

Harz Labs Dental Bleach Form2 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати временных коронок и мостов белого цвета на стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 385-405нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Цвет	Белый
Запах	Слабо выраженный
Вязкость по Брукфилду	0.8-1 спз
Содержание нелетучих компонентов	100%
Полимеризационная усадка	Менее 0,5%
Предел прочности на разрыв (готовое изделие)	65- 85 N/mm2
Удлинение при разрыве (готовое изделие)	4-6%
Твердость по Шору D (готовое изделие)	85-92 d

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта

Harz Labs Dental Pink Soft PRO resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати эластичных десневых масок на промышленных стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-365нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Цвет	Розовый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

3D printing dental materials

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Pink Soft resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати эластичных десневых масок на стереолитографических 3D принтерах LCD/DLP типа с длиной волны 385-420нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Цвет	Розовый
Запах	Слабо выраженный
Вязкость по Брукфильду	0.8-1 СПз
Содержание нелетучих компонентов	100%
Полимеризационная усадка	Менее 0,5%
Предел прочности на разрыв (готовое изделие)	25- 40 N/mm2
Удлинение при разрыве (готовое изделие)	25-30%
Твердость по Шору D (готовое изделие)	80-90 A

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

3D printing

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Pink Soft Form2 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати эластичных десневых масок на стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 385-405нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Цвет	Розовый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

щество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта

Harz Labs Dental Yellow Clear Form2 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати хирургических шаблонов на стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 385-405нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Желтый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ labs

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Yellow Clear PRO resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати хирургических шаблонов на промышленных стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-365 нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Желтый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта

Harz Labs Dental Yellow Clear resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати хирургических шаблонов на стереолитографических 3D принтерах LCD/DLP типа с длиной волны 385-420нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Желтый
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.



HARZ labs

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Sand A3 PRO resin

1. Описание:

Материал светотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати временных коронок и мостов песочного цвета А3 на промышленных стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-365нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Песочный А3
Запах	Слабо выраженный
Вязкость по Брукфилду	1,1-1,4 СПз
Содержание нелетучих компонентов	100%
Полимеризационная усадка	Менее 0,5%
Предел прочности на разрыв (готовое изделие)	65- 85 N/mm2
Удлинение при разрыве (готовое изделие)	4-6%
Твердость по Шору D (готовое изделие)	85-92 D

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

нить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых
лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте.
нить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

ООО «ХАРЦ Лабс»
info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

ИНН 7751087784
КПП 775101001
ОГРН 5177746037728

12345, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1
Тел: +7 495 291 02 00



HARZ Labs

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Sand A3 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати временных коронок и мостов песочного цвета А3 на стереолитографических 3D принтерах LCD/DLP типа с длиной волны 385-420нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Песочный А3
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.



HARZ labs

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Sand A3 Form2 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати временных коронок и мостов песочного цвета А3 на стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 385-405нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Песочный А3
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.



HARZ Labs

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта Harz Labs Dental Sand A1-A2 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати временных коронок и мостов песочного цвета A1-A2 на стереолитографических 3D принтерах LCD/DLP типа с длиной волны 385-420нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Песочный A1-A2
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.



HARZ labs

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта

Harz Labs Dental Sand A1-A2 PRO resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати временных коронок и мостов песочного цвета A1-A2 на промышленных стереолитографических 3D принтерах SLA типа с длиной волны 355-365 нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Песочный A1-A2
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.



HARZ labs
Materials for 3D Printing

12345, Россия, г.Москва,
ул.Твардовского 8с1

info@harzlabs.ru
www.harzlabs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ХАРЦ Лабс»
ИНН 7751087784 • КПП 775101001 • ОГРН 5177746037728

Спецификация продукта

Harz Labs Dental Sand A1-A2 Form2 resin

1. Описание:

Материал светоотверждаемый стоматологический на основе полимеров

2. Применение:

Предназначен для печати временных коронок и мостов песочного цвета A1-A2 на фотополимеризационных 3D принтерах SLA типа с длиной волны 385-405нм.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Непрозрачная жидкость
Цвет	Песочный A1-A2
Запах	Слабо выраженный

4. Инструкция по применению

Встряхните бутылку перед использованием. Вылейте смолу в ванну принтера. После печати модели следует мыть в этиловом или изопропиловом спирте. Полная полимеризация проводится в УФ камере.

Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте защиту для кожи, глаз и органов дыхания. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой.

5. Хранение

Хранить в плотно закрытой бутылке в защищенном от влаги, света и прямых солнечных лучей месте. Беречь от огня. Держать в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5 до +30°C в закрытой таре. Срок годности 24 месяца.

Прошито и пронумеровано

68 (шестьдесят восемь) листов

