

Инструкция по применению изделия медицинского назначения:

Щетки для очистки инструментов «Медфармсервис»
ТУ 32.50.13-007-43790314-2019,
производства ООО «ИВФ «Медфармсервис», Россия.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инструкция распространяется на щетки для очистки медицинских инструментов производства ООО «ИВФ «Медфармсервис», Россия (далее – щетки).

Варианты исполнения:

- | | |
|--|---|
| - Щетки торцевые | - Щетки торцевые двухсторонние |
| - Щетки с наконечником | - Щетки с наконечником двухсторонние |
| - Щетки с торцевым ворсом | - Щетки с торцевым ворсом двухсторонние |
| - Щетки с силиконовыми кольцами | - Щетки с силиконовыми кольцами |
| двухсторонние | |
| - Щетки с металлической щетиной | - Щетки пластиковые (тип зубная щетка) |
| - Щетки пластиковые (тип зубная щетка) двухсторонние | - Щетка-губка |

Модельный ряд в Таблице 1.

Щетки предназначены для предварительной очистки медицинских инструментов механическим способом. Щетки используются для удаления грязи или остатков органических веществ с рабочих поверхностей медицинских инструментов, из рабочего канала (каналов) и шероховатых поверхностей эндоскопов перед их дезинфекцией и стерилизацией.

Область применения – медицинские лечебно-профилактические и стационарные учреждения.

Эксплуатация щеток должна проводиться квалифицированным медицинским персоналом и в соответствии с МУ 287-113 п.5.3 и СП 3.1.3263-15 п.12.8 .

Персонал, проводящий очистку, обязан надеть средства индивидуальной защиты, включающие: - одноразовые перчатки из химически устойчивого материала;

- защитные очки, маску или защитный экран для лица;
- халат или накидку (с длинными рукавами, непромокаемые) или одноразовый водонепроницаемый фартук с рукавами (нарукавниками).

Младший медицинский персонал при наличии ран на руках, экссудативных поражений кожи или мокнущего дерматита на время заболевания отстраняется от выполнения обработки медицинских инструментов, эндоскопов и контакта с ними.

1.2 Основные технические характеристики в Таблице 1.

1.3 Структура обозначения щеток в Приложении 1.

2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Щетки используются при предварительной очистке сильно загрязненных поверхностей.

Показания к применению:

Щетки торцевые и щетки торцевые двухсторонние – для предварительной очистки стенок рабочих сквозных инструментальных каналов медицинских инструментов соответствующих диаметров.

Щетки с наконечником и щетки с наконечником двухсторонние – для предварительной очистки стенок рабочих сквозных инструментальных каналов медицинских инструментов. Наконечник служит для проталкивания крупных загрязнений через рабочий канал эндоскопа.

Щетки с торцевым ворсом и щетки с торцевым ворсом двухсторонние – для предварительной очистки стенок рабочих не сквозных и ступенчатых инструментальных каналов медицинских инструментов.

Щетки с силиконовыми кольцами и щетки с силиконовыми кольцами двухсторонние – для предварительной бережной очистки стенок рабочих сквозных инструментальных каналов медицинских инструментов.

Щетки с металлической щетиной – для предварительной очистки бранш электрохирургических медицинских инструментов от нагара.

Щетки пластиковые (тип зубная щетка) и щетки пластиковые (тип зубная щетка) двухсторонние – для предварительной очистки наружных поверхностей медицинских инструментов.

Щетка-губка для очистки сильных загрязнений колоноскопов, перед транспортировкой из процедурных кабинетов в помещение для стерилизации.

2.2. Подберите щетку подходящего размера и предназначения.

2.3. Вскройте упаковку, щетка готова к применению.

2.4. Проведите механическую очистку инструментов.

2.5. **Одноразовые щетки не могут использоваться повторно.** Проведите утилизацию по п.3.

3. УТИЛИЗАЦИЯ

3.1. Изделия после применения подлежат утилизации как медицинские отходы, в зависимости от условий применения:

а) Изделие и упаковка, не загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам класса А.

б) Изделие и его части, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам класса Б.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 При соблюдении правил хранения одноразовый медицинский инструмент не ремонтируют.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1 Щетки должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150. Воздух помещения не должен содержать коррозионно-активных примесей.

5.2 Гарантийный срок хранения – составляет 5 лет с даты изготовления, при условии хранения в чистых сухих помещениях, защищенных от прямого солнечного света при температуре от плюс 10°C до плюс 30°C и относительной влажности воздуха 35-50%.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Все претензии и замечания, по поставленной продукции, принимаются в письменном виде по адресу: 420036, РФ, РТ, г.Казань, ул. Побежимова, д.36, помещение 1012.

Или по электронной почте: mfservice@mail.ru

Таблица 1

Рисунок 1	Модель	Наименование исполнения при заказе и в документации	Масса, г	Габаритные размеры: диаметр щетины d±0,2/общая длина L±10/длина щетины l±5, мм/мм/мм
Щетки с наконечником				
a	Ш-2.80.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.80.20Н	8±2	2/80/20
a	Ш-2.100.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.100.20Н	8±2	2/100/20
a	Ш-2.120.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.120.20Н	9±2	2/120/20
a	Ш-2.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.150.20Н	10±2	2/150/20
a	Ш-2.200.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.200.20Н	15±2	2/200/20
a	Ш-2.250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.250.20Н	18±2	2/250/20
a	Ш-2.300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.300.20Н	20±2	2/300/20
a	Ш-2.360.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.360.20Н	25±3	2/360/20
a	Ш-2.420.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.420.20Н	30±3	2/420/20
a	Ш-2.500.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.500.20Н	40±5	2/500/20
a	Ш-2.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.600.20Н	50±5	2/600/20
a	Ш-3.80.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.80.20Н	8±2	3/80/20
a	Ш-3.100.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.100.20Н	8±2	3/100/20
a	Ш-3.120.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.120.20Н	9±2	3/120/20
a	Ш-3.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.150.20Н	10±2	3/150/20
a	Ш-3.200.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.200.20Н	15±2	3/200/20
a	Ш-3.250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.250.20Н	18±2	3/250/20

a	Ш-3.300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.300.20Н	20±2	3/300/20
a	Ш-3.360.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.360.20Н	25±3	3/360/20
a	Ш-3.420.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.420.20Н	30±3	3/420/20
a	Ш-3.500.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.500.20Н	40±5	3/500/20
a	Ш-3.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.600.20Н	50±5	3/600/20
a	Ш-4.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.80.30Н	8±2	4/80/30
a	Ш-4.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.100.30Н	8±2	4/100/30
a	Ш-4.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.120.30Н	9±2	4/120/30
a	Ш-4.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.150.30Н	10±2	4/150/30
a	Ш-4.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.200.30Н	15±2	4/200/30
a	Ш-4.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.250.30Н	18±2	4/250/30
a	Ш-4.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.300.30Н	20±2	4/300/30
a	Ш-4.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.360.30Н	25±3	4/360/30
a	Ш-4.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.420.30Н	30±3	4/420/30
a	Ш-4.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.500.30Н	40±5	4/500/30
a	Ш-4.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.600.30Н	50±5	4/600/30
a	Ш-5.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.80.30Н	8±2	5/80/30
a	Ш-5.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.100.30Н	8±2	5/100/30
a	Ш-5.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.120.30Н	9±2	5/120/30
a	Ш-5.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.150.30Н	10±2	5/150/30
a	Ш-5.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.200.30Н	15±2	5/200/30
a	Ш-5.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.250.30Н	18±2	5/250/30
a	Ш-5.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.300.30Н	20±2	5/300/30
a	Ш-5.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.360.30Н	25±3	5/360/30
a	Ш-5.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.420.30Н	30±3	5/420/30
a	Ш-5.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.500.30Н	40±5	5/500/30

a	Ш-5.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.600.30Н	50±5	5/600/30
a	Ш-6.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.80.30Н	8±2	6/80/30
a	Ш-6.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.100.30Н	8±2	6/100/30
a	Ш-6.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.120.30Н	9±2	6/120/30
a	Ш-6.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.150.30Н	10±2	6/150/30
a	Ш-6.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.200.30Н	15±2	6/200/30
a	Ш-6.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.250.30Н	18±2	6/250/30
a	Ш-6.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.300.30Н	20±2	6/300/30
a	Ш-6.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.360.30Н	25±3	6/360/30
a	Ш-6.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.420.30Н	30±3	6/420/30
a	Ш-6.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.500.30Н	40±5	6/500/30
a	Ш-6.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.600.30Н	50±5	6/600/30
a	Ш-7.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.80.30Н	8±2	7/80/30
a	Ш-7.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.100.30Н	8±2	7/100/30
a	Ш-7.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.120.30Н	9±2	7/120/30
a	Ш-7.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.150.30Н	10±2	7/150/30
a	Ш-7.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.200.30Н	15±2	7/200/30
a	Ш-7.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.250.30Н	18±2	7/250/30
a	Ш-7.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.300.30Н	20±2	7/300/30
a	Ш-7.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.360.30Н	25±3	7/360/30
a	Ш-7.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.420.30Н	30±3	7/420/30
a	Ш-7.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.500.30Н	40±5	7/500/30
a	Ш-7.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.600.30Н	50±5	7/600/30
a	Ш-8.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.80.30Н	8±2	8/80/30
a	Ш-8.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.100.30Н	8±2	8/100/30
a	Ш-8.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.120.30Н	9±2	8/120/30

a	Ш-8.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.150.30Н	10±2	8/150/30
a	Ш-8.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.200.30Н	15±2	8/200/30
a	Ш-8.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.250.30Н	18±2	8/250/30
a	Ш-8.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.300.30Н	20±2	8/300/30
a	Ш-8.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.360.30Н	25±3	8/360/30
a	Ш-8.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.420.30Н	30±3	8/420/30
a	Ш-8.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.500.30Н	40±5	8/500/30
a	Ш-8.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.600.30Н	50±5	8/600/30
a	Ш-10.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.80.30Н	8±2	10/80/30
a	Ш-10.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.100.30Н	8±2	10/100/30
a	Ш-10.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.120.30Н	9±2	10/120/30
a	Ш-10.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.150.30Н	10±2	10/150/30
a	Ш-10.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.200.30Н	15±2	10/200/30
a	Ш-10.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.250.30Н	18±2	10/250/30
a	Ш-10.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.300.30Н	20±2	10/300/30
a	Ш-10.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.360.30Н	25±3	10/360/30
a	Ш-10.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.420.30Н	30±3	10/420/30
a	Ш-10.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.500.30Н	40±5	10/500/30
a	Ш-10.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.600.30Н	50±5	10/600/30
a	Ш-11.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.80.30Н	8±2	11/80/30
a	Ш-11.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.100.30Н	8±2	11/100/30
a	Ш-11.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.120.30Н	9±2	11/120/30
a	Ш-11.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.150.30Н	10±2	11/150/30
a	Ш-11.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.200.30Н	15±2	11/200/30
a	Ш-11.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.250.30Н	18±2	11/250/30
a	Ш-11.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.300.30Н	20±2	11/300/30

a	Ш-11.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.360.30Н	25±3	11/360/30
a	Ш-11.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.420.30Н	30±3	11/420/30
a	Ш-11.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.500.30Н	40±5	11/500/30
a	Ш-11.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.600.30Н	50±5	11/600/30
a	Ш-15.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-15.150.30Н	10±2	15/150/30
a	Ш-15.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-15.300.30Н	20±2	15/300/30
a	Ш-15.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-15.600.30Н	50±5	15/600/30
в	ШР-2.80.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.80.20Н	8±2	2/80/20
в	ШР-2.100.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.100.20Н	8±2	2/100/20
в	ШР-2.120.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.120.20Н	9±2	2/120/20
в	ШР-2.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.150.20Н	10±2	2/150/20
в	ШР-2.200.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.200.20Н	15±2	2/200/20
в	ШР-2.250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.250.20Н	18±2	2/250/20
в	ШР-2.300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.300.20Н	20±2	2/300/20
в	ШР-2.360.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.360.20Н	25±3	2/360/20
в	ШР-2.420.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.420.20Н	30±3	2/420/20
в	ШР-2.500.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.500.20Н	40±5	2/500/20
в	ШР-2.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.600.20Н	50±5	2/600/20
в	ШР-3.80.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.80.20Н	8±2	3/80/20
в	ШР-3.100.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.100.20Н	8±2	3/100/20
в	ШР-3.120.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.120.20Н	9±2	3/120/20
в	ШР-3.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.150.20Н	10±2	3/150/20
в	ШР-3.200.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.200.20Н	15±2	3/200/20
в	ШР-3.250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.250.20Н	18±2	3/250/20
в	ШР-3.300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.300.20Н	20±2	3/300/20
в	ШР-3.360.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.360.20Н	25±3	3/360/20
	ШР-3.420.20Н	Щетка для очистки инструментов,	30±3	3/420/20

В		с наконечником, модели: ШР-3.420.20Н		
В	ШР-3.500.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.500.20Н	40±5	3/500/20
В	ШР-3.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.600.20Н	50±5	3/600/20
В	ШР-4.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.80.30Н	8±2	4/80/30
В	ШР-4.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.100.30Н	8±2	4/100/30
В	ШР-4.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.120.30Н	9±2	4/120/30
В	ШР-4.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.150.30Н	10±2	4/150/30
В	ШР-4.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.200.30Н	15±2	4/200/30
В	ШР-4.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.250.30Н	18±2	4/250/30
В	ШР-4.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.300.30Н	20±2	4/300/30
В	ШР-4.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.360.30Н	25±3	4/360/30
В	ШР-4.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.420.30Н	30±3	4/420/30
В	ШР-4.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.500.30Н	40±5	4/500/30
В	ШР-4.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.600.30Н	50±5	4/600/30
В	ШР-5.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.80.30Н	8±2	5/80/30
В	ШР-5.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.100.30Н	8±2	5/100/30
В	ШР-5.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.120.30Н	9±2	5/120/30
В	ШР-5.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.150.30Н	10±2	5/150/30
В	ШР-5.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.200.30Н	15±2	5/200/30
В	ШР-5.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.250.30Н	18±2	5/250/30
В	ШР-5.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.300.30Н	20±2	5/300/30
В	ШР-5.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.360.30Н	25±3	5/360/30
В	ШР-5.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.420.30Н	30±3	5/420/30
В	ШР-5.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.500.30Н	40±5	5/500/30
В	ШР-5.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.600.30Н	50±5	5/600/30
В	ШР-6.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.80.30Н	8±2	6/80/30
В	ШР-6.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.100.30Н	8±2	6/100/30

В	ШР-6.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.120.30Н	9±2	6/120/30
В	ШР-6.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.150.30Н	10±2	6/150/30
В	ШР-6.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.200.30Н	15±2	6/200/30
В	ШР-6.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.250.30Н	18±2	6/250/30
В	ШР-6.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.300.30Н	20±2	6/300/30
В	ШР-6.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.360.30Н	25±3	6/360/30
В	ШР-6.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.420.30Н	30±3	6/420/30
В	ШР-6.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.500.30Н	40±5	6/500/30
В	ШР-6.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.600.30Н	50±5	6/600/30
В	ШР-7.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.80.30Н	8±2	7/80/30
В	ШР-7.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.100.30Н	8±2	7/100/30
В	ШР-7.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.120.30Н	9±2	7/120/30
В	ШР-7.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.150.30Н	10±2	7/150/30
В	ШР-7.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.200.30Н	15±2	7/200/30
В	ШР-7.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.250.30Н	18±2	7/250/30
В	ШР-7.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.300.30Н	20±2	7/300/30
В	ШР-7.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.360.30Н	25±3	7/360/30
В	ШР-7.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.420.30Н	30±3	7/420/30
В	ШР-7.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.500.30Н	40±5	7/500/30
В	ШР-7.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.600.30Н	50±5	7/600/30
В	ШР-8.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.80.30Н	8±2	8/80/30
В	ШР-8.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.100.30Н	8±2	8/100/30
В	ШР-8.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.120.30Н	9±2	8/120/30
В	ШР-8.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.150.30Н	10±2	8/150/30
В	ШР-8.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.200.30Н	15±2	8/200/30
В	ШР-8.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.250.30Н	18±2	8/250/30
	ШР-8.300.30Н	Щетка для очистки инструментов,	20±2	8/300/30

В		с наконечником, модели: ШР-8.300.30Н		
В	ШР-8.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.360.30Н	25±3	8/360/30
В	ШР-8.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.420.30Н	30±3	8/420/30
В	ШР-8.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.500.30Н	40±5	8/500/30
В	ШР-8.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.600.30Н	50±5	8/600/30
В	ШР-10.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.80.30Н	8±2	10/80/30
В	ШР-10.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.100.30Н	8±2	10/100/30
В	ШР-10.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.120.30Н	9±2	10/120/30
В	ШР-10.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.150.30Н	10±2	10/150/30
В	ШР-10.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.200.30Н	15±2	10/200/30
В	ШР-10.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.250.30Н	18±2	10/250/30
В	ШР-10.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.300.30Н	20±2	10/300/30
В	ШР-10.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.360.30Н	25±3	10/360/30
В	ШР-10.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.420.30Н	30±3	10/420/30
В	ШР-10.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.500.30Н	40±5	10/500/30
В	ШР-10.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.600.30Н	50±5	10/600/30
В	ШР-11.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.80.30Н	8±2	11/80/30
В	ШР-11.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.100.30Н	8±2	11/100/30
В	ШР-11.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.120.30Н	9±2	11/120/30
В	ШР-11.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.150.30Н	10±2	11/150/30
В	ШР-11.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.200.30Н	15±2	11/200/30
В	ШР-11.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.250.30Н	18±2	11/250/30
В	ШР-11.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.300.30Н	20±2	11/300/30
В	ШР-11.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.360.30Н	25±3	11/360/30
В	ШР-11.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.420.30Н	30±3	11/420/30
В	ШР-11.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.500.30Н	40±5	11/500/30
В	ШР-11.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.600.30Н	50±5	11/600/30

б	ШК-5.1800.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-5.1800.20Н	5±2	5/1800/2
б	ШК-5.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-5.2300.20Н	5±2	5/2300/2
б	ШК-6.700.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.700.20Н	5±2	6/700/2
б	ШК-6.850.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.850.20Н	5±2	6/850/2
б	ШК-6.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.1000.20Н	5±2	6/1000/2
б	ШК-6.1250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.1250.20Н	5±2	6/1250/2
б	ШК-6.1600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.1600.20Н	5±2	6/1600/2
б	ШК-6.1800.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.1800.20Н	5±2	6/1800/2
б	ШК-6.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.2300.20Н	5±2	6/2300/2
б	ШК-10.700.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.700.20Н	5±2	10/700/2
б	ШК-10.850.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.850.20Н	5±2	10/850/2
б	ШК-10.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1000.20Н	5±2	10/1000/2
б	ШК-10.1250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1250.20Н	5±2	10/1250/2
б	ШК-10.1600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1600.20Н	5±2	10/1600/2
б	ШК-10.1800.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1800.20Н	5±2	10/1800/2
б	ШК-10.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.2300.20Н	5±2	10/2300/2
б	ШК-2.700.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.700.20Н	5±2	2/700/2
б	ШК-2.850.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.850.20Н	5±2	2/850/2
б	ШК-2.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.1000.20Н	5±2	2/1000/2
б	ШК-2.1250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.1250.20Н	5±2	2/1250/2
б	ШК-2.1600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.1600.20Н	5±2	2/1600/2
б	ШК-2.1800.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.1800.20Н	5±2	2/1800/2
б	ШК-2.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.2300.20Н	8±2	2/2300/2
б	ШК-3.700.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-3.700.20Н	5±2	3/700/2
б	ШК-3.850.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-3.850.30Н	5±2	3/850/2
б	ШК-3.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-3.1000.20Н	5±2	3/1000/2

б	ШК-10.850.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.850.20Н	5±2	10/850/2
б	ШК-10.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1000.20Н	5±2	10/1000/2
б	ШК-10.1250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1250.20Н	5±2	10/1250/2
б	ШК-10.1600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1600.20Н	5±2	10/1600/2
б	ШК-10.1800.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1800.20Н	5±2	10/1800/2
б	ШК-10.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.2300.20Н	5±2	10/2300/2

Щетки торцевые

г	Ш-2.80.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.80.20Т	8±2	2/80/2
г	Ш-2.100.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.100.20Т	8±2	2/100/2
г	Ш-2.120.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.120.20Т	9±2	2/120/2
г	Ш-2.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.150.20Т	10±2	2/150/2
г	Ш-2.200.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.200.20Т	15±2	2/200/2
г	Ш-2.250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.250.20Т	18±2	2/250/2
г	Ш-2.300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.300.20Т	20±2	2/300/2
г	Ш-2.360.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.360.20Т	25±3	2/360/2
г	Ш-2.460.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.460.20Т	30±3	2/460/2
г	Ш-2.500.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.500.20Т	40±5	2/500/2
г	Ш-2.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.600.20Т	50±5	2/600/2
г	Ш-3.80.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.80.20Т	8±2	3/80/2
г	Ш-3.100.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.100.20Т	8±2	3/100/2
г	Ш-3.120.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.120.20Т	9±2	3/120/2
г	Ш-3.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.150.20Т	10±2	3/150/2
г	Ш-3.200.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.200.20Т	15±2	3/200/2
г	Ш-3.250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.250.20Т	18±2	3/250/2
г	Ш-3.300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.300.20Т	20±2	3/300/2
г	Ш-3.360.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.360.20Т	25±3	3/360/2
г	Ш-3.460.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.460.20Т	30±3	3/460/2

г	Ш-3.500.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.500.20Т	40±5	3/500/20
г	Ш-3.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.600.20Т	50±5	3/600/20
г	Ш-4.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.80.30Т	8±2	4/80/30
г	Ш-4.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.100.30Т	8±2	4/100/30
г	Ш-4.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.120.30Т	9±2	4/120/30
г	Ш-4.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.150.30Т	10±2	4/150/30
г	Ш-4.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.200.30Т	15±2	4/200/30
г	Ш-4.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.250.30Т	18±2	4/250/30
г	Ш-4.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.300.30Т	20±2	4/300/30
г	Ш-4.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.360.30Т	25±3	4/360/30
г	Ш-4.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.460.30Т	30±3	4/460/30
г	Ш-4.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.500.30Т	40±5	4/500/30
г	Ш-4.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.600.30Т	50±5	4/600/30
г	Ш-5.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.80.30Н	8±2	5/80/30
г	Ш-5.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.100.30Т	8±2	5/100/30
г	Ш-5.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.120.30Т	9±2	5/120/30
г	Ш-5.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.150.30Т	10±2	5/150/30
г	Ш-5.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.200.30Т	15±2	5/200/30
г	Ш-5.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.250.30Т	18±2	5/250/30
г	Ш-5.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.300.30Т	20±2	5/300/30
г	Ш-5.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.360.30Т	25±3	5/360/30
г	Ш-5.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.460.30Т	30±3	5/460/30
г	Ш-5.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.500.30Т	40±5	5/500/30
г	Ш-5.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.600.30Т	50±5	5/600/30
г	Ш-6.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.80.30Т	8±2	6/80/30
г	Ш-6.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.100.30Т	8±2	6/100/30

г	Ш-6.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.120.30Т	9±2	6/120/30
г	Ш-6.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.150.30Т	10±2	6/150/30
г	Ш-6.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.200.30Т	15±2	6/200/30
г	Ш-6.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.250.30Т	18±2	6/250/30
г	Ш-6.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.300.30Т	20±2	6/300/30
г	Ш-6.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.360.30Т	25±3	6/360/30
г	Ш-6.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.460.30Т	30±3	6/460/30
г	Ш-6.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.500.30Т	40±5	6/500/30
г	Ш-6.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.600.30Т	50±5	6/600/30
г	Ш-7.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.80.30Т	8±2	7/80/30
г	Ш-7.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.100.30Т	8±2	7/100/30
г	Ш-7.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.120.30Т	9±2	7/120/30
г	Ш-7.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.150.30Т	10±2	7/150/30
г	Ш-7.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.200.30Т	15±2	7/200/30
г	Ш-7.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.250.30Т	18±2	7/250/30
г	Ш-7.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.300.30Т	20±2	7/300/30
г	Ш-7.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.360.30Т	25±3	7/360/30
г	Ш-7.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.460.30Т	30±3	7/460/30
г	Ш-7.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.500.30Т	40±5	7/500/30
г	Ш-7.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.600.30Т	50±5	7/600/30
г	Ш-8.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.80.30Т	8±2	8/80/30
г	Ш-8.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.100.30Т	8±2	8/100/30
г	Ш-8.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.120.30Т	9±2	8/120/30
г	Ш-8.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.150.30Т	10±2	8/150/30
г	Ш-8.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.200.30Т	15±2	8/200/30
г	Ш-8.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.250.30Т	18±2	8/250/30

г	Ш-2.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.300.30Т	20±2	8/300/30
г	Ш-8.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.360.30Т	25±3	8/360/30
г	Ш-8.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.460.30Т	30±3	8/460/30
г	Ш-8.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.500.30Т	40±5	8/500/30
г	Ш-8.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.600.30Т	50±5	8/600/30
г	Ш-10.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.80.30Т	8±2	10/80/30
г	Ш-10.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.100.30Т	8±2	10/100/30
г	Ш-10.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.120.30Т	9±2	10/120/30
г	Ш-10.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.150.30Т	10±2	10/150/30
г	Ш-10.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.200.30Т	15±2	10/200/30
г	Ш-10.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.250.30Т	18±2	10/250/30
г	Ш-10.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.300.30Т	20±2	10/300/30
г	Ш-10.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.360.30Т	25±3	10/360/30
г	Ш-10.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.460.30Т	30±3	10/460/30
г	Ш-10.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.500.30Т	40±5	10/500/30
г	Ш-10.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.600.30Т	50±5	10/600/30
г	Ш-11.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.80.30Т	8±2	11/80/30
г	Ш-11.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.100.30Т	8±2	11/100/30
г	Ш-11.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.120.30Т	9±2	11/120/30
г	Ш-11.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.150.30Т	10±2	11/150/30
г	Ш-11.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.200.30Т	15±2	11/200/30
г	Ш-11.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.250.30Т	18±2	11/250/30
г	Ш-11.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.300.30Т	20±2	11/300/30
г	Ш-11.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.360.30Т	25±3	11/360/30
г	Ш-11.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.460.30Т	30±3	11/460/30
г	Ш-11.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.500.30Т	40±5	11/500/30

г	Ш-11.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.600.30Т	50±5	11/600/3
г	Ш-15.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-15.150.30Т	50±5	15/150/3
г	Ш-15.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-15.300.30Т	50±5	15/300/3
г	Ш-15.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-15.600.30Т	50±5	15/600/3
д	ШК-2.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.700.20Т	5±2	2/700/2
д	ШК-2.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.850.20Т	5±2	2/850/2
д	ШК-2.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.1000.20Т,	5±2	2/1000/2
д	ШК-2.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.1250.20Т,	5±2	2/1250/2
д	ШК-2.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.1600.20Т	5±2	2/1600/2
д	ШК-2.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.1800.20Т	5±2	2/1800/2
д	ШК-2.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.2300.20Т	8±2	2/2300/2
д	ШК-3.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.700.20Т	5±2	3/700/2
д	ШК-3.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.850.30Т	5±2	3/850/2
д	ШК-3.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.1000.20Т	5±2	3/1000/2
д	ШК-3.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.1250.20Т	5±2	3/1250/2
д	ШК-3.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.1600.20Т	5±2	3/1600/2
д	ШК-3.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.1800.20Т	5±2	3/1800/2
д	ШК-3.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.2300.20Т	5±2	3/2300/2
д	ШК-4.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.700.20Т	5±2	4/700/2
д	ШК-4.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.850.20Т	5±2	4/850/2
д	ШК-4.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.1000.20Т	5±2	4/1000/2
д	ШК-4.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.1250.20Т	5±2	4/1250/2
д	ШК-4.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.1600.20Т	5±2	4/1600/2
д	ШК-4.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.1800.20Т	5±2	4/1800/2
д	ШК-4.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.2300.20Т	8±2	4/2300/2
д	ШК-5.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.700.20Т	5±2	5/700/2

д	ШК-5.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.850.20Т	5±2	5/850/20
д	ШК-5.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.1000.20Т	5±2	5/1000/20
д	ШК-5.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.1250.20Т	5±2	5/1250/20
д	ШК-5.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.1600.20Т	5±2	5/1600/20
д	ШК-5.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.1800.20Т	5±2	5/1800/20
д	ШК-5.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.2300.20Т	5±2	5/2300/20
д	ШК-6.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.700.20Т	5±2	6/700/20
д	ШК-6.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.850.20Т	5±2	6/850/20
д	ШК-6.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.1000.20Т	5±2	6/1000/20
д	ШК-6.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.1250.20Т	5±2	6/1250/20
д	ШК-6.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.1600.20Т	5±2	6/1600/20
д	ШК-6.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.1800.20Т	5±2	6/1800/20
д	ШК-6.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.2300.20Т	5±2	6/2300/20
д	ШК-10.100.40Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.100.40Т	5±2	10/100/40
д	ШК-10.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.700.20Т	5±2	10/700/20
д	ШК-10.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.850.20Т	5±2	10/850/20
д	ШК-10.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.1000.20Т	5±2	10/1000/20
д	ШК-10.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.1250.20Т	5±2	10/1250/20
д	ШК-10.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.1600.20Т	5±2	10/1600/20
д	ШК-10.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.1800.20Т	5±2	10/1800/20
д	ШК-10.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.2300.20Т	5±2	10/2300/20
е	ШР-2.80.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.80.20Т	8±2	2/80/20
е	ШР-2.100.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.100.20Т	8±2	2/100/20
е	ШР-2.120.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.120.20Т	9±2	2/120/20
е	ШР-2.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.150.20Т	10±2	2/150/20
е	ШР-2.200.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.200.20Т	15±2	2/200/20

e	ШР-2.250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.250.20Т	18±2	2/250/20
e	ШР-2.300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.300.20Т	20±2	2/300/20
e	ШР-2.360.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.360.20Т	25±3	2/360/20
e	ШР-2.420.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.420.20Т	30±3	2/420/20
e	ШР-2.500.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.500.20Т	40±5	2/500/20
e	ШР-2.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.600.20Т	50±5	2/600/20
e	ШР-3.80.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.80.20Т	8±2	3/80/20
e	ШР-3.100.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.100.20Т	8±2	3/100/20
e	ШР-3.120.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.120.20Т	9±2	3/120/20
e	ШР-3.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.150.20Т	10±2	3/150/20
e	ШР-3.200.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.200.20Т	15±2	3/200/20
e	ШР-3.250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.250.20Т	18±2	3/250/20
e	ШР-3.300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.300.20Т	20±2	3/300/20
e	ШР-3.360.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.360.20Т	25±3	3/360/20
e	ШР-3.420.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.420.20Т	30±3	3/420/20
e	ШР-3.500.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.500.20Т	40±5	3/500/20
e	ШР-3.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.600.20Т	50±5	3/600/20
e	ШР-4.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.80.30Т	8±2	4/80/30
e	ШР-4.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.100.30Т	8±2	4/100/30
e	ШР-4.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.120.30Т	9±2	4/120/30
e	ШР-4.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.150.30Т	10±2	4/150/30
e	ШР-4.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.200.30Т	15±2	4/200/30
e	ШР-4.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.250.30Т	18±2	4/250/30
e	ШР-4.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.300.30Т	20±2	4/300/30
e	ШР-4.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.360.30Т	25±3	4/360/30
e	ШР-4.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.420.30Т	30±3	4/420/30

e	ШР-4.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.500.30Т	40±5	4/500/30
e	ШР-4.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.600.30Т	50±5	4/600/30
e	ШР-5.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.80.30Т	8±2	5/80/30
e	ШР-5.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.100.30Т	8±2	5/100/30
e	ШР-5.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.120.30Т	9±2	5/120/30
e	ШР-5.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.150.30Т	10±2	5/150/30
e	ШР-5.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.200.30Т	15±2	5/200/30
e	ШР-5.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.250.30Т	18±2	5/250/30
e	ШР-5.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.300.30Т	20±2	5/300/30
e	ШР-5.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.360.30Т	25±3	5/360/30
e	ШР-5.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.420.30Т	30±3	5/420/30
e	ШР-5.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.500.30Т	40±5	5/500/30
e	ШР-5.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.600.30Т	50±5	5/600/30
e	ШР-6.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.80.30Т	8±2	6/80/30
e	ШР-6.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.100.30Т	8±2	6/100/30
e	ШР-6.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.120.30Т	9±2	6/120/30
e	ШР-6.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.150.30Т	10±2	6/150/30
e	ШР-6.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.200.30Т	15±2	6/200/30
e	ШР-6.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.250.30Т	18±2	6/250/30
e	ШР-6.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.300.30Т	20±2	6/300/30
e	ШР-6.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.360.30Т	25±3	6/360/30
e	ШР-6.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.420.30Т	30±3	6/420/30
e	ШР-6.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.500.30Т	40±5	6/500/30
e	ШР-6.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.600.30Т	50±5	6/600/30
e	ШР-7.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.80.30Т	8±2	7/80/30
e	ШР-7.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.100.30Т	8±2	7/100/30

e	ШР-7.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.120.30Т	9±2	7/120/30
e	ШР-7.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.150.30Т	10±2	7/150/30
e	ШР-7.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.200.30Т	15±2	7/200/30
e	ШР-7.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.250.30Т	18±2	7/250/30
e	ШР-7.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.300.30Т	20±2	7/300/30
e	ШР-7.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.360.30Т	25±3	7/360/30
e	ШР-7.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.420.30Т	30±3	7/420/30
e	ШР-7.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.500.30Т	40±5	7/500/30
e	ШР-7.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.600.30Т	50±5	7/600/30
e	ШР-8.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.80.30Т	8±2	8/80/30
e	ШР-8.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.100.30Т	8±2	8/100/30
e	ШР-8.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.120.30Т	9±2	8/120/30
e	ШР-8.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.150.30Т	10±2	8/150/30
e	ШР-8.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.200.30Т	15±2	8/200/30
e	ШР-8.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.250.30Т	18±2	8/250/30
e	ШР-8.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.300.30Т	20±2	8/300/30
e	ШР-8.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.360.30Т	25±3	8/360/30
e	ШР-8.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.420.30Т,	30±3	8/420/30
e	ШР-8.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.500.30Т	40±5	8/500/30
e	ШР-8.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.600.30Т	50±5	8/600/30
e	ШР-10.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.80.30Т	8±2	10/80/30
e	ШР-10.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.100.30Т	8±2	10/100/30
e	ШР-10.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.120.30Т	9±2	10/120/30
e	ШР-10.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.150.30Т	10±2	10/150/30
e	ШР-10.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.200.30Т	15±2	10/200/30
e	ШР-10.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.250.30Т	18±2	10/250/30

е	ШР-10.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.300.30Т	20±2	10/300/30
е	ШР-10.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.360.30Т	25±3	10/360/30
е	ШР-10.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.420.30Т	30±3	10/420/30
е	ШР-10.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.500.30Т	40±5	10/500/30
е	ШР-10.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.600.30Т	50±5	10/600/30
е	ШР-11.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.80.30Т	8±2	11/80/30
е	ШР-11.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.100.30Т	8±2	11/100/30
е	ШР-11.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.120.30Т	9±2	11/120/30
е	ШР-11.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.150.30Т	10±2	11/150/30
е	ШР-11.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.200.30Т,	15±2	11/200/30
е	ШР-11.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.250.30Т	18±2	11/250/30
е	ШР-11.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.300.30Т	20±2	11/300/30
е	ШР-11.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.360.30Т	25±3	11/360/30
е	ШР-11.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.420.30Т	30±3	11/420/30
е	ШР-11.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.500.30Т	40±5	11/500/30
е	ШР-11.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.600.30Т	50±5	11/600/30
Щетки с торцевым ворсом				
ж	Ш-2.80.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.80.20	8±2	2/80/20
ж	Ш-2.100.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.100.20	8±2	2/100/20
ж	Ш-2.120.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.120.20	9±2	2/120/20
ж	Ш-2.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.150.20	10±2	2/150/20
ж	Ш-2.200.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.200.20	15±2	2/200/20
ж	Ш-2.250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.250.20	18±2	2/250/20
ж	Ш-2.300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.300.20	20±2	2/300/20
ж	Ш-2.360.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.360.20	25±3	2/360/20
ж	Ш-2.460.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.460.20	30±3	2/460/20
ж	Ш-2.500.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.500.20	40±5	2/500/20

ж	Ш-2.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.600.20	50±5	2/600/20
ж	Ш-3.80.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.80.20	8±2	3/80/20
ж	Ш-3.100.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.100.20	8±2	3/100/20
ж	Ш-3.120.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.120.20	9±2	3/120/20
ж	Ш-3.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.150.20	10±2	3/150/20
ж	Ш-3.200.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.200.20	15±2	3/200/20
ж	Ш-3.250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.250.20	18±2	3/250/20
ж	Ш-3.300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.300.20	20±2	3/300/20
ж	Ш-3.360.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.360.20	25±3	3/360/20
ж	Ш-3.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.460.30	30±3	3/460/30
ж	Ш-3.500.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.500.20	40±5	3/500/20
ж	Ш-3.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.600.20	50±5	3/600/20
ж	Ш-4.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.80.30	8±2	4/80/30
ж	Ш-4.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.100.30	8±2	4/100/30
ж	Ш-4.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.120.30	9±2	4/120/30
ж	Ш-4.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.150.30	10±2	4/150/30
ж	Ш-4.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.200.30	15±2	4/200/30
ж	Ш-4.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.250.30	18±2	4/250/30
ж	Ш-4.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.300.30	20±2	4/300/30
ж	Ш-4.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.360.30	25±3	4/360/30
ж	Ш-4.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.460.30	30±3	4/460/30
ж	Ш-4.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.500.30	40±5	4/500/30
ж	Ш-4.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.600.30	50±5	4/600/30
ж	Ш-5.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.80.30	8±2	5/80/30
ж	Ш-5.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.100.30	8±2	5/100/30
ж	Ш-5.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.120.30	9±2	5/120/30

ж	Ш-5.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.150.30	10±2	5/150/30
ж	Ш-5.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.200.30	15±2	5/200/30
ж	Ш-5.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.250.30	18±2	5/250/30
ж	Ш-5.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.300.30	20±2	5/300/30
ж	Ш-5.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.360.30	25±3	5/360/30
ж	Ш-5.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.460.30	30±3	5/460/30
ж	Ш-5.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.500.30	40±5	5/500/30
ж	Ш-5.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.600.30	50±5	5/600/30
ж	Ш-6.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.80.30	8±2	6/80/30
ж	Ш-6.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.100.30	8±2	6/100/30
ж	Ш-6.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.120.30	9±2	6/120/30
ж	Ш-6.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.150.30	10±2	6/150/30
ж	Ш-6.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.200.30	15±2	6/200/30
ж	Ш-6.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.250.30	18±2	6/250/30
ж	Ш-6.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.300.30	20±2	6/300/30
ж	Ш-6.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.360.30	25±3	6/360/30
ж	Ш-6.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.460.30	30±3	6/460/30
ж	Ш-6.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.500.30	40±5	6/500/30
ж	Ш-6.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.600.30	50±5	6/600/30
ж	Ш-7.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.80.30	8±2	7/80/30
ж	Ш-7.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.100.30	8±2	7/100/30
ж	Ш-7.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.120.30	9±2	7/120/30
ж	Ш-7.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.150.30	10±2	7/150/30
ж	Ш-7.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.200.30	15±2	7/200/30
ж	Ш-7.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.250.30	18±2	7/250/30
ж	Ш-7.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.300.30	20±2	7/300/30

ж	Ш-7.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.360.30	25±3	7/360/30
ж	Ш-7.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.460.30	30±3	7/460/30
ж	Ш-7.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.500.30	40±5	7/500/30
ж	Ш-7.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.600.30	50±5	7/600/30
ж	Ш-8.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.80.30	8±2	8/80/30
ж	Ш-8.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.100.30	8±2	8/100/30
ж	Ш-8.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.120.30	9±2	8/120/30
ж	Ш-8.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.150.30	10±2	8/150/30
ж	Ш-8.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.200.30	15±2	8/200/30
ж	Ш-8.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.250.30	18±2	8/250/30
ж	Ш-8.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.300.30	20±2	8/300/30
ж	Ш-8.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.360.30	25±3	8/360/30
ж	Ш-8.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.460.30	30±3	8/460/30
ж	Ш-8.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.500.30	40±5	8/500/30
ж	Ш-8.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.600.30	50±5	8/600/30
ж	Ш-10.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.80.30	8±2	10/80/30
ж	Ш-10.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.100.30	8±2	10/100/30
ж	Ш-10.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.120.30	9±2	10/120/30
ж	Ш-10.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.150.30	10±2	10/150/30
ж	Ш-10.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.200.30	15±2	10/200/30
ж	Ш-10.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.250.30	18±2	10/250/30
ж	Ш-10.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.300.30	20±2	10/300/30
ж	Ш-10.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.360.30	25±3	10/360/30
ж	Ш-10.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.460.30	30±3	10/460/30
ж	Ш-10.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.500.30	40±5	10/500/30
ж	Ш-10.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.600.30	50±5	10/600/30

ж	Ш-11.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.80.30	8±2	11/80/30
ж	Ш-11.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.100.30	8±2	11/100/30
ж	Ш-11.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.120.30	9±2	11/120/30
ж	Ш-11.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.150.30	10±2	11/150/30
ж	Ш-11.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.200.30	15±2	11/200/30
ж	Ш-11.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.250.30	18±2	11/250/30
ж	Ш-11.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.300.30	20±2	11/300/30
ж	Ш-11.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.360.30	25±3	11/360/30
ж	Ш-11.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.460.30	30±3	11/460/30
ж	Ш-11.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.500.30	40±5	11/500/30
ж	Ш-11.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.600.30	50±5	11/600/30
ж	Ш-15.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-15.150.30	50±5	15/150/30
ж	Ш-15.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-15.300.30	50±5	15/300/30
ж	Ш-15.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-15.600.30	50±5	15/600/30
з	ШР-2.80.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.80.20	8±2	2/80/20
з	ШР-2.100.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.100.20	8±2	2/100/20
з	ШР-2.120.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.120.20	9±2	2/120/20
з	ШР-2.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.150.20	10±2	2/150/20
з	ШР-2.200.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.200.20	15±2	2/200/20
з	ШР-2.250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.250.20	18±2	2/250/20
з	ШР-2.300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.300.20	20±2	2/300/20
з	ШР-2.360.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.360.20	25±3	2/360/20
з	ШР-2.420.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.420.20	30±3	2/420/20
з	ШР-2.500.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.500.20	40±5	2/500/20
з	ШР-2.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.600.20	50±5	2/600/20
з	ШР-3.80.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.80.20	8±2	3/80/20

3	ШР-3.100.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.100.20	8±2	3/100/20
3	ШР-3.120.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.120.20	9±2	3/120/20
3	ШР-3.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.150.20	10±2	3/150/20
3	ШР-3.200.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.200.20	15±2	3/200/20
3	ШР-3.250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.250.20	18±2	3/250/20
3	ШР-3.300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.300.20	20±2	3/300/20
3	ШР-3.360.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.360.20	25±3	3/360/20
3	ШР-3.420.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.420.20	30±3	3/420/20
3	ШР-3.500.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.500.20	40±5	3/500/20
3	ШР-3.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.600.20	50±5	3/600/20
3	ШР-4.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.80.30	8±2	4/80/30
3	ШР-4.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.100.30	8±2	4/100/30
3	ШР-4.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.120.30	9±2	4/120/30
3	ШР-4.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.150.30	10±2	4/150/30
3	ШР-4.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.200.30	15±2	4/200/30
3	ШР-4.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.250.30	18±2	4/250/30
3	ШР-4.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.300.30	20±2	4/300/30
3	ШР-4.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.360.30	25±3	4/360/30
3	ШР-4.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.420.30	30±3	4/420/30
3	ШР-4.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.500.30	40±5	4/500/30
3	ШР-4.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.600.30	50±5	4/600/30
3	ШР-5.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-5.80.30	8±2	5/80/30
3	ШР-5.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-5.100.30	8±2	5/100/30
3	ШР-5.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-5.120.30	9±2	5/120/30
3	ШР-5.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-5.150.30	10±2	5/150/30
3	ШР-5.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-5.200.30	15±2	5/200/30

3	ШР-5.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-5.250.30	18±2	5/250/30
3	ШР-5.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-5.300.30	20±2	5/300/30
3	ШР-5.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-5.420.30	30±3	5/420/30
3	ШР-5.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-5.500.30	40±5	5/500/30
3	ШР-5.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-5.600.30	50±5	5/600/30
3	ШР-6.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.80.30	8±2	6/80/30
3	ШР-6.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.100.30	8±2	6/100/30
3	ШР-6.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.120.30	9±2	6/120/30
3	ШР-6.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.150.30	10±2	6/150/30
3	ШР-6.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.200.30	15±2	6/200/30
3	ШР-6.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.250.30	18±2	6/250/30
3	ШР-6.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.300.30	20±2	6/300/30
3	ШР-6.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.360.30	25±3	6/360/30
3	ШР-6.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.420.30	30±3	6/420/30
3	ШР-6.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.500.30	40±5	6/500/30
3	ШР-6.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.600.30	50±5	6/600/30
3	ШР-7.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.80.30	8±2	7/80/30
3	ШР-7.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.100.30	8±2	7/100/30
3	ШР-7.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.120.30	9±2	7/120/30
3	ШР-7.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.150.30	10±2	7/150/30
3	ШР-7.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.200.30	15±2	7/200/30
3	ШР-7.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.250.30	18±2	7/250/30
3	ШР-7.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.300.30	20±2	7/300/30
3	ШР-7.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.360.30	25±3	7/360/30
3	ШР-7.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.420.30	30±3	7/420/30
3	ШР-7.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.500.30	40±5	7/500/30

3	ШР-7.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.600.30	50±5	7/600/30
3	ШР-8.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.80.30	8±2	8/80/30
3	ШР-8.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.100.30	8±2	8/100/30
3	ШР-8.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.120.30	9±2	8/120/30
3	ШР-8.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.150.30	10±2	8/150/30
3	ШР-8.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.200.30	15±2	8/200/30
3	ШР-8.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.250.30	18±2	8/250/30
3	ШР-8.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.300.30	20±2	8/300/30
3	ШР-8.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.360.30	25±3	8/360/30
3	ШР-8.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.420.30	30±3	8/420/30
3	ШР-8.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.500.30	40±5	8/500/30
3	ШР-8.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.600.30	50±5	8/600/30
3	ШР-10.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.80.30	8±2	10/80/30
3	ШР-10.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.100.30	8±2	10/100/30
3	ШР-10.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.120.30	9±2	10/120/30
3	ШР-10.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.150.30	10±2	10/150/30
3	ШР-10.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.200.30	15±2	10/200/30
3	ШР-10.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-10.250.30	18±2	10/250/30
3	ШР-10.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.300.30	20±2	10/300/30
3	ШР-10.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.360.30	25±3	10/360/30
3	ШР-10.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.420.30	30±3	10/420/30
3	ШР-10.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.500.30	40±5	10/500/30
3	ШР-10.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.600.30	50±5	10/600/30
3	ШР-11.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.80.30	8±2	11/80/30
3	ШР-11.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.100.30	8±2	11/100/30
3	ШР-11.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.120.30	9±2	11/120/30

3	ШР-11.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.150.30	10±2	11/150/30
3	ШР-11.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.200.30	15±2	11/200/30
3	ШР-11.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.250.30	18±2	11/250/30
3	ШР-11.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.300.30	20±2	11/300/30
3	ШР-11.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.360.30	25±3	11/360/30
3	ШР-11.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.420.30	30±3	11/420/30
3	ШР-11.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.500.30	40±5	11/500/30
3	ШР-11.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.600.30	50±5	11/600/30
и	ШК-2.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.700.20	5±2	2/700/20
и	ШК-2.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.850.20	5±2	2/850/20
и	ШК-2.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.1000.20	5±2	2/1000/20
и	ШК-2.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.1250.20	5±2	2/1250/20
и	ШК-2.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.1600.20	5±2	2/1600/20
и	ШК-2.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.1800.20	5±2	2/1800/20
и	ШК-2.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.2300.20	8±2	2/2300/20
и	ШК-3.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.700.20	5±2	3/700/20
и	ШК-3.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.850.30	5±2	3/850/20
и	ШК-3.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.1000.20	5±2	3/1000/20
и	ШК-3.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.1250.20	5±2	3/1250/20
и	ШК-3.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.1600.20	5±2	3/1600/20
и	ШК-3.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.1800.20	5±2	3/1800/20
и	ШК-3.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.2300.20	5±2	3/2300/20
и	ШК-4.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.700.20	5±2	4/700/20
и	ШК-4.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.850.50	5±2	4/850/20
и	ШК-4.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.1000.20	5±2	4/1000/20
и	ШК-4.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.1250.20	5±2	4/1250/20

и	ШК-4.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.1600.20	5±2	4/1600/2
и	ШК-4.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.1800.20	5±2	4/1800/2
и	ШК-4.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.2300.20	8±2	4/2300/2
и	ШК-5.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.700.20	5±2	5/700/20
и	ШК-5.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.850.50	5±2	5/850/20
и	ШК-5.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.1000.20	5±2	5/1000/2
и	ШК-5.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.1250.20	5±2	5/1250/2
и	ШК-5.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.1600.20	5±2	5/1600/2
и	ШК-5.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.1800.20	5±2	5/1800/2
и	ШК-5.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.2300.20	5±2	5/2300/2
и	ШК-6.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.700.20	5±2	6/700/20
и	ШК-6.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.850.50	5±2	6/850/8
и	ШК-6.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.1000.20	5±2	6/1000/2
и	ШК-6.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.1250.20	5±2	6/1250/2
и	ШК-6.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.1600.20	5±2	6/1600/2
и	ШК-6.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.1800.20	5±2	6/1800/2
и	ШК-6.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.2300.20	5±2	6/2300/2
и	ШК-10.100.40	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-10.100.40	5±2	10/100/4
и	ШК-10.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-10.700.20	5±2	10/700/2
и	ШК-10.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-10.850.20	5±2	10/850/2
и	ШК-10.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШК-10.1000.20	5±2	10/1000/2
и	ШК-10.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШК-10.1250.20	5±2	10/1250/2
и	ШК-10.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШК-10.1600.20	5±2	10/1600/2
и	ШК-10.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШК-10.1800.20	5±2	10/1800/2
и	ШК-10.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-10.2300.20	5±2	10/2300/2
Щетки с силиконовыми кольцами				
н	ШС-2.700.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели:	5±2	2/700/30

		ШС-2.700.30		
н	ШС-2.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-2.1000.30	5±2	2/1000/30
н	ШС-2.1200.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-2.1200.30	5±2	2/1200/30
н	ШС-2.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-2.1650.30	5±2	2/1650/30
н	ШС-2.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-2.1950.30	5±2	2/1950/30
н	ШС-2.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-2.2300.30	5±2	2/2300/30
н	ШС-3.700.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.700.30	5±2	3/700/30
н	ШС-3.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.1000.30	5±2	3/1000/30
н	ШС-3.1200.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.1200.30	5±2	3/1200/30
н	ШС-3.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.1650.30	5±2	3/1650/30
н	ШС-3.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.1950.30	5±2	3/1950/30
н	ШС-3.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.2300.30	5±2	3/2300/30
н	ШС-4.700.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.700.30	5±2	4/700/30
н	ШС-4.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.1000.30	5±2	4/1000/30
н	ШС-4.1200.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.1200.30	5±2	4/1200/30
н	ШС-4.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.1650.30	5±2	4/1650/30
н	ШС-4.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.1950.30	5±2	4/1950/30
н	ШС-4.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.2300.30	5±2	4/2300/30
н	ШС-5.700.30	Щетка для очистки инструментов, с	5±2	5/700/30

		силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.700.30		
Н	ШС-5.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.1000.30	5±2	5/1000/30
Н	ШС-5.1200.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.1200.30	5±2	5/1200/30
Н	ШС-5.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.1650.30	5±2	5/1650/30
Н	ШС-5.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.1950.30	5±2	5/1950/30
Н	ШС-5.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.2300.30	5±2	5/2300/30
Н	ШС-11.700.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.700.30	5±2	11/700/30
Н	ШС-11.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.1000.30	5±2	11/1000/30
Н	ШС-11.1200.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.1200.30	5±2	11/1200/30
Н	ШС-11.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.1650.30	5±2	11/1650/30
Н	ШС-11.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.1950.30	5±2	11/1950/30
Н	ШС-11.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.2300.30	5±2	11/2300/30
Щетки пластиковые (тип зубная щетка)				
О	ШИ-75.220.15	Щетка для очистки инструментов, пластиковая, модели: ШИ-75.220.15	60±10	75/220/15
Щетки с металлической щетиной				
О	МШИ-55.180.12	Щетка для очистки инструментов, с металлической щетиной, модели: МШИ-55.180.12	30±5	55/180/12
О	МШИ-35.175.10	Щетка для очистки инструментов, с металлической щетиной, модели: МШИ-35.175.10	25±5	35/175/10
Двухсторонние				Габаритные размеры: об длина L± длина щети 11±5/ диам щетины d±

				длина щетины 12±5/ диаметр щетины d2±0,2/ мм/мм/мм/мм/ мм
Щетки пластиковые (тип зубная щетка) двухсторонние				
п	ДШИ-11.220.14	Щетка для очистки инструментов, пластиковая, двухсторонняя, модели: ДШИ-11.220.14	30±5	220/30/11/45/14
Щетки торцевые двухсторонние				
к	ДШ-2.4.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.4.150.20Т	10±2	150/20/2/20/4
к	ДШ-2.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.150.20Т	10±2	150/20/2/20/2
к	ДШ-2.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.600.20Т	30±5	600/20/2/20/2
к	ДШ-2.900.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.900.20Т	5±2	900/20/2/20/2
к	ДШ-2.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.1000.20Т,	5±2	1000/20/2/20/2
к	ДШ-2.4.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.4.1650.20Т	5±2	1650/20/2/20/4
к	ДШ-2.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.1650.20Т	5±2	1650/20/2/20/2
к	ДШ-2.4.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.4.1950.20Т	5±2	1950/20/2/20/4
к	ДШ-2.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.1950.20Т	5±2	1950/20/2/20/2
к	ДШ-2.4.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.4.2300.20Т	5±2	2300/20/2/20/4
к	ДШ-2.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.2300.20Т	5±2	2300/20/2/20/2
к	ДШ-3.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.150.20Т	10±2	150/20/3/20/3
к	ДШ-3.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.600.20Т	30±5	600/20/3/20/3
к	ДШ-3.900.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.900.20Т	5±2	900/20/3/20/3
к	ДШ-3.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.1000.20Т	5±2	1000/20/3/20/3
к	ДШ-3.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.1650.20Т	5±2	1650/20/3/20/3
к	ДШ-3.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.1950.20Т	5±2	1950/20/3/20/3
к	ДШ-3.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.2300.20Т	5±2	2300/20/3/20/3
к	ДШ-5.10.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.10.150.20Т	10±2	150/20/5/20/10

К	ДШ-5.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.150.20Т	10±2	150/20/5/20
К	ДШ-5.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.600.20Т	30±5	600/20/5/20
К	ДШ-5.900.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.900.20Т	5±2	900/20/5/20
К	ДШ-5.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.1000.20Т	5±2	1000/20/5/20
К	ДШ-5.10.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.10.1650.20Т	5±2	1650/20/5/20
К	ДШ-5.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.1650.20Т	5±2	1650/20/5/20
К	ДШ-5.10.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.10.1950.20Т	5±2	1950/20/5/20
К	ДШ-5.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.1950.20Т	5±2	1950/20/5/20
К	ДШ-5.10.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.10.2300.20Т	5±2	2300/20/5/20
К	ДШ-5.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.2300.20Т	5±2	2300/20/5/20
К	ДШ-10.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.150.20Т	10±2	150/20/10/20
К	ДШ-10.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.600.20Т	30±5	600/20/10/20
К	ДШ-10.900.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.900.20Т	5±2	900/20/10/20
К	ДШ-10.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.1000.20Т	5±2	1000/20/10/20
К	ДШ-10.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.1650.20Т	5±2	1650/20/10/20
К	ДШ-10.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.1950.20Т	5±2	1950/20/10/20
К	ДШ-10.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.2300.20Т	5±2	2300/20/10/20

Щетки с торцевым ворсом двухсторонние

Л	ДШ-2.4.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.150.20	10±2	150/20/2/20
Л	ДШ-2.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.150.20	10±2	150/20/2/20
Л	ДШ-2.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.600.20	30±5	600/20/2/20
Л	ДШ-2.900.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.900.20	5±2	900/20/2/20
Л	ДШ-2.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1000.20	5±2	1000/20/2/20
Л	ДШ-2.4.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.1650.20	5±2	1650/20/2/20

л	ДШ-2.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1650.20	5±2	1650/20/2/20/2
л	ДШ-2.4.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.1950.20	5±2	1950/20/2/20/4
л	ДШ-2.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1950.20	5±2	1950/20/2/20/2
л	ДШ-2.4.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.2300.20	5±2	2300/20/2/20/4
л	ДШ-2.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.2300.20	5±2	2300/20/2/20/2
л	ДШ-3.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.150.20	10±2	150/20/3/20/3
л	ДШ-3.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.600.20	30±5	600/20/3/20/3
л	ДШ-3.900.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.900.20	5±2	900/20/3/20/3
л	ДШ-3.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1000.20	5±2	1000/20/3/20/3
л	ДШ-3.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1650.20	5±2	1650/20/3/20/3
л	ДШ-3.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1950.20	5±2	1950/20/3/20/3
л	ДШ-3.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.2300.20	5±2	2300/20/3/20/3
л	ДШ-5.10.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.150.20	10±2	150/20/5/20/10
л	ДШ-5.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.150.20	10±2	150/20/5/20/5
л	ДШ-5.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.600.20	30±5	600/20/5/20/5
л	ДШ-5.900.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.900.20	5±2	900/20/5/20/5
л	ДШ-5.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1000.20	5±2	1000/20/5/20/5
л	ДШ-5.10.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели:	5±2	1650/20/5/20/


		ДШ-5.10.1650.20		10
л	ДШ-5.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1650.20	5±2	1650/20/50
л	ДШ-5.10.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.1950.20	5±2	1950/20/50 10
л	ДШ-5.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1950.20	5±2	1950/20/50
л	ДШ-5.10.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.2300.20	5±2	2300/20/50 10
л	ДШ-5.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.2300.20	5±2	2300/20/50
л	ДШ-10.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.150.20	10±2	150/20/100 10
л	ДШ-10.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.600.20	30±5	600/20/10/20
л	ДШ-10.900.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.900.20	5±2	900/20/10/20
л	ДШ-10.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1000.20	5±2	1000/20/100 10
л	ДШ-10.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1650.20	5±2	1650/20/100 10
л	ДШ-10.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1950.20	5±2	1950/20/100 10
л	ДШ-10.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.2300.20	5±2	2300/20/100 10
Щетки с наконечником двухсторонние				
м	ДШ-2.4.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.150.20Н	10±2	150/20/20
м	ДШ-2.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.150.20Н	10±2	150/20/20
м	ДШ-2.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.600.20Н	30±5	600/20/20
м	ДШ-2.900.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.900.20Н	5±2	900/20/20
м	ДШ-2.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1000.20Н	5±2	1000/20/20

М	ДШ-2.4.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.1650.20Н	5±2	1650/20/2/20/4
М	ДШ-2.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1650.20Н	5±2	1650/20/2/20/2
М	ДШ-2.4.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.1950.20Н	5±2	1950/20/2/20/4
М	ДШ-2.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1950.20Н	5±2	1950/20/2/20/2
М	ДШ-2.4.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.2300.20Н	5±2	2300/20/2/20/4
М	ДШ-2.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.2300.20Н	5±2	2300/20/2/20/2
М	ДШ-3.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.150.20Н	10±2	150/20/3/20/3
М	ДШ-3.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.600.20Н	30±5	600/20/3/20/3
М	ДШ-3.900.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.900.20Н	5±2	900/20/3/20/3
М	ДШ-3.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1000.20Н	5±2	1000/20/3/20/3
М	ДШ-3.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1650.20Н	5±2	1650/20/3/20/3
М	ДШ-3.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1950.20Н	5±2	1950/20/3/20/3
М	ДШ-3.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.2300.20Н	5±2	2300/20/3/20/3
М	ДШ-5.10.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.150.20Н	10±2	150/20/5/20/10
М	ДШ-5.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.150.20Н	10±2	150/20/5/20/5
М	ДШ-5.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.600.20Н	30±5	600/20/5/20/5
М	ДШ-5.900.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.900.20Н	5±2	900/20/5/20/5
М	ДШ-5.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1000.20Н	5±2	1000/20/5/20/5
М	ДШ-5.10.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели:	5±2	1650/20/5/20/10

		ДШ-5.10.1650.20Н		
М	ДШ-5.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1650.20Н	5±2	1650/20/5/20
М	ДШ-5.10.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.1950.20Н	5±2	1950/20/5/20
М	ДШ-5Т.10Н.1950.20.60	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5Т.10Н.1950.20.60	5±2	1950/20/5/60
М	ДШ-5.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1950.20Н	5±2	1950/20/5/20
М	ДШ-5.10.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.2300.20Н	5±2	2300/20/5/20
М	ДШ-5.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.2300.20Н	5±2	2300/20/5/20
М	ДШ-10.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.150.20Н	10±2	150/20/10/20
М	ДШ-10.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.600.20Н	30±5	600/20/10/20
М	ДШ-10.900.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.900.20Н	5±2	900/20/10/20
М	ДШ-10.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1000.20Н	5±2	1000/20/10/20
М	ДШ-10.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1650.20Н	5±2	1650/20/10/20
М	ДШ-10.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1950.20Н	5±2	1950/20/10/20
М	ДШ-10.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.2300.20Н	5±2	2300/20/10/20
Щетки с силиконовыми кольцами двухсторонние				
Р	ДШС-5.900.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.900.30	6±2	900/30/5/20
Р	ДШС-5.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.1000.30	6±2	1000/30/5/20
Р	ДШС-5.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.1650.30	6±2	1650/30/5/20
Р	ДШС-5.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.1950.30	6±2	1950/30/5/20
Р	ДШС-5.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.2300.30	6±2	2300/30/5/20

		модели: ДШС-5.2300.30		
Р	ДШС-5.2400.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.2400.30	6 ± 2	2400/30/5/30/5
Щетка-губка				
с	ШГ-5	Щетка-губка для очистки инструментов, модели: ШГ-5	6 ± 2	97/55/5
с	ШГ-10	Щетка-губка для очистки инструментов, модели: ШГ-10	6 ± 2	100/55/10


Рисунок 1

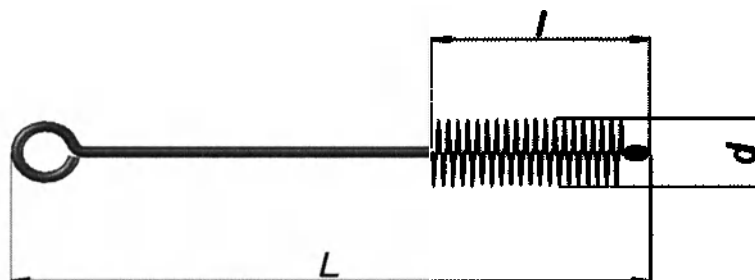


а.) Щетки с наконечником




б.) Щетки с наконечником

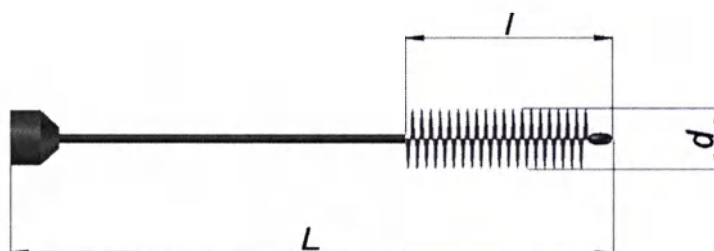


в.) Щетки с наконечником

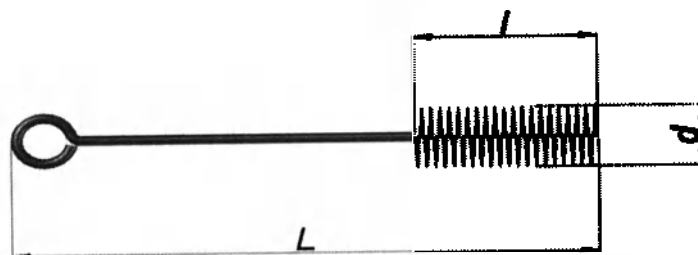


г.) Щетки торцевые

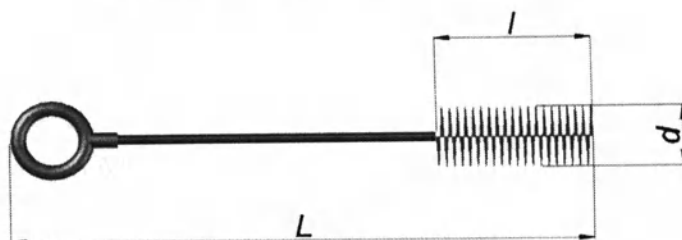


д.) Щетки торцевые

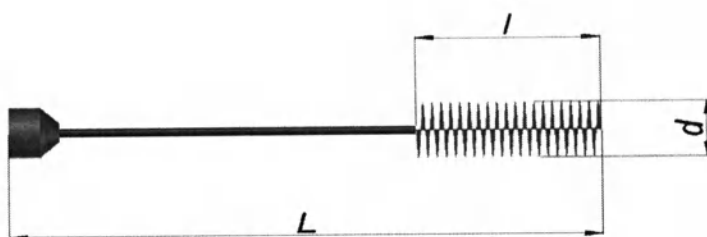

е.) Щетки торцевые

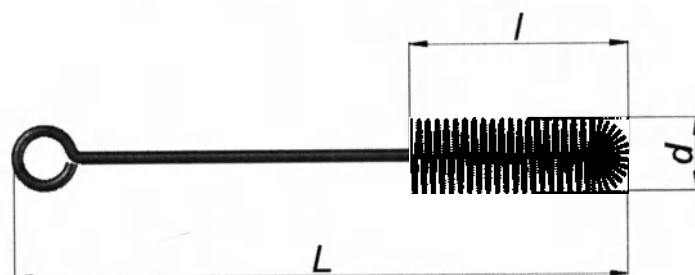


ж.) Щетки с торцевым ворсом

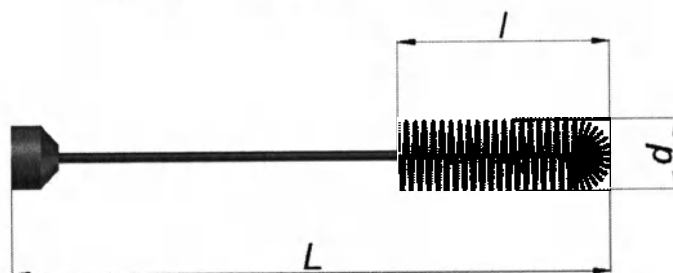

з.) Щетки с торцевым ворсом




и.) Щетки с торцевым ворсом

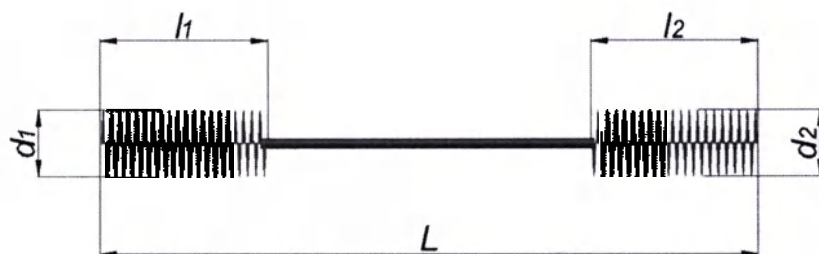


к.) Щетки торцевые двухсторонние



л.) Щетки с торцевым ворсом двухсторонние

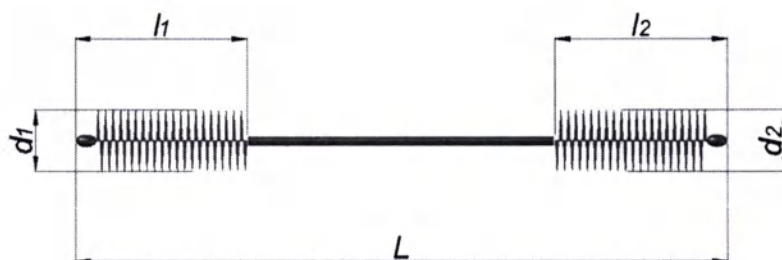


м.) Щетки с наконечником двухсторонние

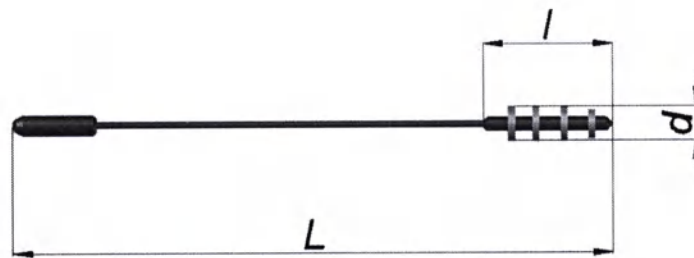


н.) Щетки с силиконовыми кольцами




о.) Щетки пластиковые (тип зубная щетка);
Щетки с металлической щетиной

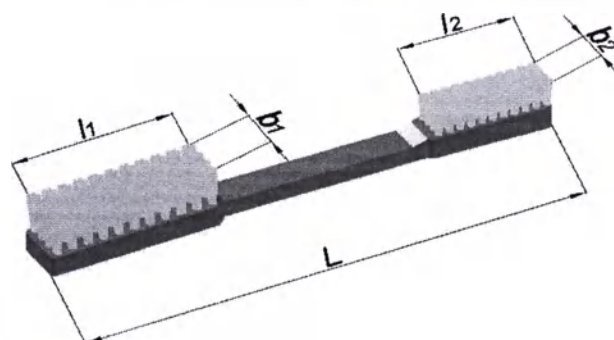

п.) Щетки пластиковые (тип зубная щетка) двухсторонние

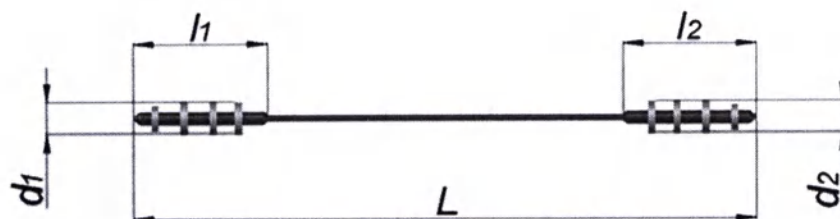

р.) Щетки с силиконовыми кольцами двухсторонние

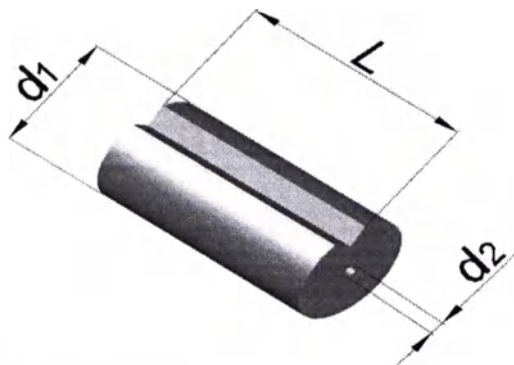

с.) Щетка-губка

Приложение 1

Структура обозначения щеток для очистки инструментов

х	Ш	х-хх.	хххх.	хх	Х	
						Варианты исполнения: Н - наконечник Т- торцевая Отсутствие символа- с торцевым ворсом
						Длина рабочей части(щетины), мм
						Длина инструмента, мм
						Диаметр рабочей части(щетины), мм
						Тип рукоятки: Р- рукоятка металлическая К- кольцо(пластиковое) И- пластиковые (тип зубная щетка)
						Варианты исполнения: С- с силиконовыми кольцами Г- щетка-губка
						Код - обозначение щетки
						Варианты исполнения: Д- двухсторонние М- с металлической щетиной

Директор ООО «ИВФ «Медфармсервис»

Чукарин А.В.

Инструкция по применению изделия медицинского назначения:

Щетки для очистки инструментов «Медфармсервис»

ТУ 32.50.13-007-43790314-2019,

производства ООО «ИВФ «Медфармсервис», Россия.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инструкция распространяется на щетки для очистки медицинских инструментов производства ООО «ИВФ «Медфармсервис», Россия (далее – щетки).

Варианты исполнения:

- | | |
|--|---|
| - Щетки торцевые | - Щетки торцевые двухсторонние |
| - Щетки с наконечником | - Щетки с наконечником двухсторонние |
| - Щетки с торцевым ворсом | - Щетки с торцевым ворсом двухсторонние |
| - Щетки с силиконовыми кольцами | - Щетки с силиконовыми кольцами |
| двухсторонние | |
| - Щетки с металлической щетиной | - Щетки пластиковые (тип зубная щетка) |
| - Щетки пластиковые (тип зубная щетка) двухсторонние | - Щетка-губка |

Модельный ряд Таблица 1.

Щетки предназначены для предварительной очистки медицинских инструментов механическим способом. Щетки используются для удаления грязи или остатков органических веществ с рабочих поверхностей медицинских инструментов, из рабочего канала (каналов) и шероховатых поверхностей эндоскопов перед их дезинфекцией и стерилизацией.

Область применения – медицинские лечебно-профилактические и стационарные учреждения.

Эксплуатация щеток должна проводиться квалифицированным медицинским персоналом и в соответствии с МУ 287-113 п.5.3 и СП 3.1.3263-15 п.12.8 .

Персонал, проводящий очистку, обязан надеть средства индивидуальной защиты, включающие: - одноразовые перчатки из химически устойчивого материала;
- защитные очки, маску или защитный экран для лица;
- халат или накидку (с длинными рукавами, непромокаемые) или одноразовый водонепроницаемый фартук с рукавами (нарукавниками).

Младший медицинский персонал при наличии ран на руках, экссудативных поражений кожи или мокнущего дерматита на время заболевания отстраняется от выполнения обработки медицинских инструментов, эндоскопов и контакта с ними.

1.2 Основные технические характеристики Таблица 1.

1.3 Структура обозначения щеток в Приложении 1.

2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Щетки используются при предварительной очистке сильно загрязненных поверхностей.

Показания к применению:

Щетки торцевые и щетки торцевые двухсторонние – для предварительной очистки стенок рабочих сквозных инструментальных каналов медицинских инструментов соответствующих диаметров.

Щетки с наконечником и щетки с наконечником двухсторонние – для предварительной очистки стенок рабочих сквозных инструментальных каналов медицинских инструментов. Наконечник служит для проталкивания крупных загрязнений через рабочий канал эндоскопа.

Щетки с торцевым ворсом и щетки с торцевым ворсом двухсторонние – для предварительной очистки стенок рабочих не сквозных и ступенчатых инструментальных каналов медицинских инструментов.

Щетки с силиконовыми кольцами и щетки с силиконовыми кольцами двухсторонние – для предварительной бережной очистки стенок рабочих сквозных инструментальных каналов медицинских инструментов.

Щетки с металлической щетиной – для предварительной очистки бранш электрохирургических медицинских инструментов от нагара.

Щетки пластиковые (тип зубная щетка) и щетки пластиковые (тип зубная щетка) двухсторонние – для предварительной очистки наружных поверхностей медицинских инструментов.

Щетка-губка для очистки сильных загрязнений колоноскопов, перед транспортировкой из процедурных кабинетов в помещение для стерилизации.

2.2. Подберите щетку подходящего размера и предназначения.

2.3. Вскройте упаковку, щетка готова к применению.

2.4. Проведите механическую очистку инструментов.

2.5. **Одноразовые щетки не могут использоваться повторно.** Проведите утилизацию по п.3.

3. УТИЛИЗАЦИЯ

3.1. Изделия после применения подлежат утилизации как медицинские отходы, в зависимости от условий применения:

а) Изделие и упаковка, не загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам класса А.

б) Изделие и его части, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам класса Б.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 При соблюдении правил хранения одноразовый медицинский инструмент не ремонтируют.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1 Щетки должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150. Воздух помещения не должен содержать коррозионно-активных примесей.

5.2 Гарантийный срок хранения – составляет 5 лет с даты изготовления, при условии хранения в чистых сухих помещениях, защищенных от прямого солнечного света при температуре от плюс 10°C до плюс 30°C и относительной влажности воздуха 35-50%.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Все претензии и замечания, по поставленной продукции, принимаются в письменном виде по адресу: 420036, РФ, РТ, г.Казань, ул. Побежимова, д.36, помещение 1012.

Или по электронной почте: mfservice@mail.ru

Таблица 1

Рисунок 1	Модель	Наименование исполнения при заказе и в документации	Масса, г	Габаритные размеры: диаметр щетины $d \pm 0,2$ /общая длина $L \pm 10$ /длина щетины $l \pm 5$, мм/мм/мм
Щетки с наконечником				
a	Ш-2.80.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.80.20Н	8 ± 2	2/80/20
a	Ш-2.100.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.100.20Н	8 ± 2	2/100/20
a	Ш-2.120.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.120.20Н	9 ± 2	2/120/20
a	Ш-2.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.150.20Н	10 ± 2	2/150/20
a	Ш-2.200.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.200.20Н	15 ± 2	2/200/20
a	Ш-2.250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.250.20Н	18 ± 2	2/250/20
a	Ш-2.300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.300.20Н	20 ± 2	2/300/20
a	Ш-2.360.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.360.20Н	25 ± 3	2/360/20
a	Ш-2.420.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.420.20Н	30 ± 3	2/420/20
a	Ш-2.500.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.500.20Н	40 ± 5	2/500/20
a	Ш-2.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-2.600.20Н	50 ± 5	2/600/20
a	Ш-3.80.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.80.20Н	8 ± 2	3/80/20
a	Ш-3.100.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.100.20Н	8 ± 2	3/100/20
a	Ш-3.120.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.120.20Н	9 ± 2	3/120/20
a	Ш-3.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.150.20Н	10 ± 2	3/150/20
a	Ш-3.200.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.200.20Н	15 ± 2	3/200/20
a	Ш-3.250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.250.20Н	18 ± 2	3/250/20

a	Ш-3.300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.300.20Н	20±2	3/300/20
a	Ш-3.360.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.360.20Н	25±3	3/360/20
a	Ш-3.420.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.420.20Н	30±3	3/420/20
a	Ш-3.500.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.500.20Н	40±5	3/500/20
a	Ш-3.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-3.600.20Н	50±5	3/600/20
a	Ш-4.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.80.30Н	8±2	4/80/30
a	Ш-4.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.100.30Н	8±2	4/100/30
a	Ш-4.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.120.30Н	9±2	4/120/30
a	Ш-4.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.150.30Н	10±2	4/150/30
a	Ш-4.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.200.30Н	15±2	4/200/30
a	Ш-4.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.250.30Н	18±2	4/250/30
a	Ш-4.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.300.30Н	20±2	4/300/30
a	Ш-4.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.360.30Н	25±3	4/360/30
a	Ш-4.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.420.30Н	30±3	4/420/30
a	Ш-4.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.500.30Н	40±5	4/500/30
a	Ш-4.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-4.600.30Н	50±5	4/600/30
a	Ш-5.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.80.30Н	8±2	5/80/30
a	Ш-5.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.100.30Н	8±2	5/100/30
a	Ш-5.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.120.30Н	9±2	5/120/30
a	Ш-5.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.150.30Н	10±2	5/150/30
a	Ш-5.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.200.30Н	15±2	5/200/30
a	Ш-5.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.250.30Н	18±2	5/250/30
a	Ш-5.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.300.30Н	20±2	5/300/30
a	Ш-5.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.360.30Н	25±3	5/360/30
a	Ш-5.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.420.30Н	30±3	5/420/30
a	Ш-5.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.500.30Н	40±5	5/500/30

a	Ш-5.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-5.600.30Н	50±5	5/600/30
a	Ш-6.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.80.30Н	8±2	6/80/30
a	Ш-6.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.100.30Н	8±2	6/100/30
a	Ш-6.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.120.30Н	9±2	6/120/30
a	Ш-6.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.150.30Н	10±2	6/150/30
a	Ш-6.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.200.30Н	15±2	6/200/30
a	Ш-6.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.250.30Н	18±2	6/250/30
a	Ш-6.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.300.30Н	20±2	6/300/30
a	Ш-6.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.360.30Н	25±3	6/360/30
a	Ш-6.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.420.30Н	30±3	6/420/30
a	Ш-6.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.500.30Н	40±5	6/500/30
a	Ш-6.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.600.30Н	50±5	6/600/30
a	Ш-7.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.80.30Н	8±2	7/80/30
a	Ш-7.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.100.30Н	8±2	7/100/30
a	Ш-7.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.120.30Н	9±2	7/120/30
a	Ш-7.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.150.30Н	10±2	7/150/30
a	Ш-7.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.200.30Н	15±2	7/200/30
a	Ш-7.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.250.30Н	18±2	7/250/30
a	Ш-7.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.300.30Н	20±2	7/300/30
a	Ш-7.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.360.30Н	25±3	7/360/30
a	Ш-7.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.420.30Н	30±3	7/420/30
a	Ш-7.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.500.30Н	40±5	7/500/30
a	Ш-7.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.600.30Н	50±5	7/600/30
a	Ш-8.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.80.30Н	8±2	8/80/30
a	Ш-8.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.100.30Н	8±2	8/100/30
a	Ш-8.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.120.30Н	9±2	8/120/30

a	Ш-8.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.150.30Н	10±2	8/150/30
a	Ш-8.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.200.30Н	15±2	8/200/30
a	Ш-8.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.250.30Н	18±2	8/250/30
a	Ш-8.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.300.30Н	20±2	8/300/30
a	Ш-8.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.360.30Н	25±3	8/360/30
a	Ш-8.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.420.30Н	30±3	8/420/30
a	Ш-8.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.500.30Н	40±5	8/500/30
a	Ш-8.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-8.600.30Н	50±5	8/600/30
a	Ш-10.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.80.30Н	8±2	10/80/30
a	Ш-10.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.100.30Н	8±2	10/100/30
a	Ш-10.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.120.30Н	9±2	10/120/30
a	Ш-10.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.150.30Н	10±2	10/150/30
a	Ш-10.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.200.30Н	15±2	10/200/30
a	Ш-10.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.250.30Н	18±2	10/250/30
a	Ш-10.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.300.30Н	20±2	10/300/30
a	Ш-10.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.360.30Н	25±3	10/360/30
a	Ш-10.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.420.30Н	30±3	10/420/30
a	Ш-10.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.500.30Н	40±5	10/500/30
a	Ш-10.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-10.600.30Н	50±5	10/600/30
a	Ш-11.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.80.30Н	8±2	11/80/30
a	Ш-11.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.100.30Н	8±2	11/100/30
a	Ш-11.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.120.30Н	9±2	11/120/30
a	Ш-11.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.150.30Н	10±2	11/150/30
a	Ш-11.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.200.30Н	15±2	11/200/30
a	Ш-11.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.250.30Н	18±2	11/250/30
a	Ш-11.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.300.30Н	20±2	11/300/30

a	Ш-11.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.360.30Н	25±3	11/360/30
a	Ш-11.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.420.30Н	30±3	11/420/30
a	Ш-11.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.500.30Н	40±5	11/500/30
a	Ш-11.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-11.600.30Н	50±5	11/600/30
a	Ш-15.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-15.150.30Н	10±2	15/150/30
a	Ш-15.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-15.300.30Н	20±2	15/300/30
a	Ш-15.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-15.600.30Н	50±5	15/600/30
в	ШР-2.80.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.80.20Н	8±2	2/80/20
в	ШР-2.100.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.100.20Н	8±2	2/100/20
в	ШР-2.120.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.120.20Н	9±2	2/120/20
в	ШР-2.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.150.20Н	10±2	2/150/20
в	ШР-2.200.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.200.20Н	15±2	2/200/20
в	ШР-2.250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.250.20Н	18±2	2/250/20
в	ШР-2.300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.300.20Н	20±2	2/300/20
в	ШР-2.360.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.360.20Н	25±3	2/360/20
в	ШР-2.420.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.420.20Н	30±3	2/420/20
в	ШР-2.500.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.500.20Н	40±5	2/500/20
в	ШР-2.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-2.600.20Н	50±5	2/600/20
в	ШР-3.80.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.80.20Н	8±2	3/80/20
в	ШР-3.100.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.100.20Н	8±2	3/100/20
в	ШР-3.120.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.120.20Н	9±2	3/120/20
в	ШР-3.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.150.20Н	10±2	3/150/20
в	ШР-3.200.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.200.20Н	15±2	3/200/20
в	ШР-3.250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.250.20Н	18±2	3/250/20
в	ШР-3.300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.300.20Н	20±2	3/300/20
в	ШР-3.360.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.360.20Н	25±3	3/360/20
	ШР-3.420.20Н	Щетка для очистки инструментов,	30±3	3/420/20

В		с наконечником, модели: ШР-3.420.20Н		
В	ШР-3.500.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.500.20Н	40±5	3/500/20
В	ШР-3.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-3.600.20Н	50±5	3/600/20
В	ШР-4.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.80.30Н	8±2	4/80/30
В	ШР-4.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.100.30Н	8±2	4/100/30
В	ШР-4.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.120.30Н	9±2	4/120/30
В	ШР-4.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.150.30Н	10±2	4/150/30
В	ШР-4.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.200.30Н	15±2	4/200/30
В	ШР-4.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.250.30Н	18±2	4/250/30
В	ШР-4.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.300.30Н	20±2	4/300/30
В	ШР-4.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.360.30Н	25±3	4/360/30
В	ШР-4.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.420.30Н	30±3	4/420/30
В	ШР-4.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.500.30Н	40±5	4/500/30
В	ШР-4.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-4.600.30Н	50±5	4/600/30
В	ШР-5.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.80.30Н	8±2	5/80/30
В	ШР-5.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.100.30Н	8±2	5/100/30
В	ШР-5.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.120.30Н	9±2	5/120/30
В	ШР-5.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.150.30Н	10±2	5/150/30
В	ШР-5.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.200.30Н	15±2	5/200/30
В	ШР-5.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.250.30Н	18±2	5/250/30
В	ШР-5.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.300.30Н	20±2	5/300/30
В	ШР-5.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.360.30Н	25±3	5/360/30
В	ШР-5.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.420.30Н	30±3	5/420/30
В	ШР-5.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.500.30Н	40±5	5/500/30
В	ШР-5.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-5.600.30Н	50±5	5/600/30
В	ШР-6.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.80.30Н	8±2	6/80/30
В	ШР-6.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.100.30Н	8±2	6/100/30

В	ШР-6.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-6.120.30Н	9±2	6/120/30
В	ШР-6.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.150.30Н	10±2	6/150/30
В	ШР-6.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.200.30Н	15±2	6/200/30
В	ШР-6.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.250.30Н	18±2	6/250/30
В	ШР-6.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.300.30Н	20±2	6/300/30
В	ШР-6.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.360.30Н	25±3	6/360/30
В	ШР-6.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.420.30Н	30±3	6/420/30
В	ШР-6.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.500.30Н	40±5	6/500/30
В	ШР-6.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-6.600.30Н	50±5	6/600/30
В	ШР-7.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.80.30Н	8±2	7/80/30
В	ШР-7.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.100.30Н	8±2	7/100/30
В	ШР-7.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.120.30Н	9±2	7/120/30
В	ШР-7.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.150.30Н	10±2	7/150/30
В	ШР-7.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: Ш-7.200.30Н	15±2	7/200/30
В	ШР-7.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.250.30Н	18±2	7/250/30
В	ШР-7.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.300.30Н	20±2	7/300/30
В	ШР-7.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.360.30Н	25±3	7/360/30
В	ШР-7.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.420.30Н	30±3	7/420/30
В	ШР-7.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.500.30Н	40±5	7/500/30
В	ШР-7.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-7.600.30Н	50±5	7/600/30
В	ШР-8.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.80.30Н	8±2	8/80/30
В	ШР-8.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.100.30Н	8±2	8/100/30
В	ШР-8.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.120.30Н	9±2	8/120/30
В	ШР-8.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.150.30Н	10±2	8/150/30
В	ШР-8.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.200.30Н	15±2	8/200/30
В	ШР-8.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.250.30Н	18±2	8/250/30
	ШР-8.300.30Н	Щетка для очистки инструментов,	20±2	8/300/30

В		с наконечником, модели: ШР-8.300.30Н		
В	ШР-8.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.360.30Н	25±3	8/360/30
В	ШР-8.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.420.30Н	30±3	8/420/30
В	ШР-8.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.500.30Н	40±5	8/500/30
В	ШР-8.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-8.600.30Н	50±5	8/600/30
В	ШР-10.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.80.30Н	8±2	10/80/30
В	ШР-10.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.100.30Н	8±2	10/100/30
В	ШР-10.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.120.30Н	9±2	10/120/30
В	ШР-10.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.150.30Н	10±2	10/150/30
В	ШР-10.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.200.30Н	15±2	10/200/30
В	ШР-10.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.250.30Н	18±2	10/250/30
В	ШР-10.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.300.30Н	20±2	10/300/30
В	ШР-10.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.360.30Н	25±3	10/360/30
В	ШР-10.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.420.30Н	30±3	10/420/30
В	ШР-10.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.500.30Н	40±5	10/500/30
В	ШР-10.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-10.600.30Н	50±5	10/600/30
В	ШР-11.80.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.80.30Н	8±2	11/80/30
В	ШР-11.100.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.100.30Н	8±2	11/100/30
В	ШР-11.120.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.120.30Н	9±2	11/120/30
В	ШР-11.150.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.150.30Н	10±2	11/150/30
В	ШР-11.200.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.200.30Н	15±2	11/200/30
В	ШР-11.250.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.250.30Н	18±2	11/250/30
В	ШР-11.300.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.300.30Н	20±2	11/300/30
В	ШР-11.360.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.360.30Н	25±3	11/360/30
В	ШР-11.420.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.420.30Н	30±3	11/420/30
В	ШР-11.500.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.500.30Н	40±5	11/500/30
В	ШР-11.600.30Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШР-11.600.30Н	50±5	11/600/30

б	ШК-5.1800.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-5.1800.20Н	5±2	5/1800/20
б	ШК-5.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-5.2300.20Н	5±2	5/2300/20
б	ШК-6.700.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.700.20Н	5±2	6/700/20
б	ШК-6.850.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.850.20Н	5±2	6/850/20
б	ШК-6.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.1000.20Н	5±2	6/1000/20
б	ШК-6.1250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.1250.20Н	5±2	6/1250/20
б	ШК-6.1600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.1600.20Н	5±2	6/1600/20
б	ШК-6.1800.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.1800.20Н	5±2	6/1800/20
б	ШК-6.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-6.2300.20Н	5±2	6/2300/20
б	ШК-10.700.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.700.20Н	5±2	10/700/20
б	ШК-10.850.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.850.20Н	5±2	10/850/20
б	ШК-10.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1000.20Н	5±2	10/1000/20
б	ШК-10.1250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1250.20Н	5±2	10/1250/20
б	ШК-10.1600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1600.20Н	5±2	10/1600/20
б	ШК-10.1800.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1800.20Н	5±2	10/1800/20
б	ШК-10.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.2300.20Н	5±2	10/2300/20
б	ШК-2.700.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.700.20Н	5±2	2/700/20
б	ШК-2.850.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.850.20Н	5±2	2/850/20
б	ШК-2.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.1000.20Н	5±2	2/1000/20
б	ШК-2.1250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.1250.20Н	5±2	2/1250/20
б	ШК-2.1600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.1600.20Н	5±2	2/1600/20
б	ШК-2.1800.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.1800.20Н	5±2	2/1800/20
б	ШК-2.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-2.2300.20Н	8±2	2/2300/20
б	ШК-3.700.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-3.700.20Н	5±2	3/700/20
б	ШК-3.850.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-3.850.30Н	5±2	3/850/20
б	ШК-3.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-3.1000.20Н	5±2	3/1000/20

6	ШК-10.850.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.850.20Н	5±2	10/8502
6	ШК-10.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1000.20Н	5±2	10/10002
6	ШК-10.1250.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1250.20Н	5±2	10/12502
6	ШК-10.1600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1600.20Н	5±2	10/16002
6	ШК-10.1800.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.1800.20Н	5±2	10/18002
6	ШК-10.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, модели: ШК-10.2300.20Н	5±2	10/23002
Щетки торцевые				
г	Ш-2.80.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.80.20Т	8±2	2/8020
г	Ш-2.100.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.100.20Т	8±2	2/10020
г	Ш-2.120.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.120.20Т	9±2	2/12020
г	Ш-2.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.150.20Т	10±2	2/15020
г	Ш-2.200.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.200.20Т	15±2	2/20020
г	Ш-2.250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.250.20Т	18±2	2/25020
г	Ш-2.300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.300.20Т	20±2	2/30020
г	Ш-2.360.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.360.20Т	25±3	2/36020
г	Ш-2.460.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.460.20Т	30±3	2/46020
г	Ш-2.500.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.500.20Т	40±5	2/50020
г	Ш-2.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-2.600.20Т	50±5	2/60020
г	Ш-3.80.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.80.20Т	8±2	3/8020
г	Ш-3.100.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.100.20Т	8±2	3/10020
г	Ш-3.120.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.120.20Т	9±2	3/12020
г	Ш-3.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.150.20Т	10±2	3/15020
г	Ш-3.200.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.200.20Т	15±2	3/20020
г	Ш-3.250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.250.20Т	18±2	3/25020
г	Ш-3.300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.300.20Т	20±2	3/30020
г	Ш-3.360.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.360.20Т	25±3	3/36020
г	Ш-3.460.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.460.20Т	30±3	3/46020

г	Ш-3.500.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.500.20Т	40±5	3/500/20
г	Ш-3.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-3.600.20Т	50±5	3/600/20
г	Ш-4.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.80.30Т	8±2	4/80/30
г	Ш-4.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.100.30Т	8±2	4/100/30
г	Ш-4.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.120.30Т	9±2	4/120/30
г	Ш-4.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.150.30Т	10±2	4/150/30
г	Ш-4.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.200.30Т	15±2	4/200/30
г	Ш-4.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.250.30Т	18±2	4/250/30
г	Ш-4.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.300.30Т	20±2	4/300/30
г	Ш-4.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.360.30Т	25±3	4/360/30
г	Ш-4.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.460.30Т	30±3	4/460/30
г	Ш-4.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.500.30Т	40±5	4/500/30
г	Ш-4.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-4.600.30Т	50±5	4/600/30
г	Ш-5.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.80.30Н	8±2	5/80/30
г	Ш-5.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.100.30Т	8±2	5/100/30
г	Ш-5.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.120.30Т	9±2	5/120/30
г	Ш-5.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.150.30Т	10±2	5/150/30
г	Ш-5.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.200.30Т	15±2	5/200/30
г	Ш-5.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.250.30Т	18±2	5/250/30
г	Ш-5.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.300.30Т	20±2	5/300/30
г	Ш-5.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.360.30Т	25±3	5/360/30
г	Ш-5.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.460.30Т	30±3	5/460/30
г	Ш-5.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.500.30Т	40±5	5/500/30
г	Ш-5.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-5.600.30Т	50±5	5/600/30
г	Ш-6.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.80.30Т	8±2	6/80/30
г	Ш-6.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.100.30Т	8±2	6/100/30

г	Ш-6.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.120.30Т	9±2	6/120/30
г	Ш-6.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.150.30Т	10±2	6/150/30
г	Ш-6.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.200.30Т	15±2	6/200/30
г	Ш-6.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.250.30Т	18±2	6/250/30
г	Ш-6.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.300.30Т	20±2	6/300/30
г	Ш-6.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.360.30Т	25±3	6/360/30
г	Ш-6.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.460.30Т	30±3	6/460/30
г	Ш-6.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.500.30Т	40±5	6/500/30
г	Ш-6.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-6.600.30Т	50±5	6/600/30
г	Ш-7.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.80.30Т	8±2	7/80/30
г	Ш-7.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.100.30Т	8±2	7/100/30
г	Ш-7.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.120.30Т	9±2	7/120/30
г	Ш-7.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.150.30Т	10±2	7/150/30
г	Ш-7.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.200.30Т	15±2	7/200/30
г	Ш-7.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.250.30Т	18±2	7/250/30
г	Ш-7.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.300.30Т	20±2	7/300/30
г	Ш-7.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.360.30Т	25±3	7/360/30
г	Ш-7.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.460.30Т	30±3	7/460/30
г	Ш-7.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.500.30Т	40±5	7/500/30
г	Ш-7.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-7.600.30Т	50±5	7/600/30
г	Ш-8.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.80.30Т	8±2	8/80/30
г	Ш-8.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.100.30Т	8±2	8/100/30
г	Ш-8.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.120.30Т	9±2	8/120/30
г	Ш-8.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.150.30Т	10±2	8/150/30
г	Ш-8.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.200.30Т	15±2	8/200/30
г	Ш-8.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.250.30Т	18±2	8/250/30

г	Ш-2.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.300.30Т	20±2	8/300/30
г	Ш-8.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.360.30Т	25±3	8/360/30
г	Ш-8.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.460.30Т	30±3	8/460/30
г	Ш-8.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.500.30Т	40±5	8/500/30
г	Ш-8.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-8.600.30Т	50±5	8/600/30
г	Ш-10.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.80.30Т	8±2	10/80/30
г	Ш-10.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.100.30Т	8±2	10/100/30
г	Ш-10.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.120.30Т	9±2	10/120/30
г	Ш-10.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.150.30Т	10±2	10/150/30
г	Ш-10.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.200.30Т	15±2	10/200/30
г	Ш-10.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.250.30Т	18±2	10/250/30
г	Ш-10.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.300.30Т	20±2	10/300/30
г	Ш-10.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.360.30Т	25±3	10/360/30
г	Ш-10.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.460.30Т	30±3	10/460/30
г	Ш-10.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.500.30Т	40±5	10/500/30
г	Ш-10.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-10.600.30Т	50±5	10/600/30
г	Ш-11.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.80.30Т	8±2	11/80/30
г	Ш-11.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.100.30Т	8±2	11/100/30
г	Ш-11.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.120.30Т	9±2	11/120/30
г	Ш-11.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.150.30Т	10±2	11/150/30
г	Ш-11.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.200.30Т	15±2	11/200/30
г	Ш-11.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.250.30Т	18±2	11/250/30
г	Ш-11.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.300.30Т	20±2	11/300/30
г	Ш-11.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.360.30Т	25±3	11/360/30
г	Ш-11.460.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.460.30Т	30±3	11/460/30
г	Ш-11.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.500.30Т	40±5	11/500/30

г	Ш-11.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-11.600.30Т	50±5	11/600/30
г	Ш-15.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-15.150.30Т	50±5	15/150/30
г	Ш-15.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-15.300.30Т	50±5	15/300/30
г	Ш-15.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: Ш-15.600.30Т	50±5	15/600/30
д	ШК-2.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.700.20Т	5±2	2/700/20
д	ШК-2.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.850.20Т	5±2	2/850/20
д	ШК-2.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.1000.20Т,	5±2	2/1000/20
д	ШК-2.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.1250.20Т,	5±2	2/1250/20
д	ШК-2.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.1600.20Т	5±2	2/1600/20
д	ШК-2.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.1800.20Т	5±2	2/1800/20
д	ШК-2.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-2.2300.20Т	8±2	2/2300/20
д	ШК-3.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.700.20Т	5±2	3/700/20
д	ШК-3.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.850.30Т	5±2	3/850/20
д	ШК-3.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.1000.20Т	5±2	3/1000/20
д	ШК-3.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.1250.20Т	5±2	3/1250/20
д	ШК-3.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.1600.20Т	5±2	3/1600/20
д	ШК-3.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.1800.20Т	5±2	3/1800/20
д	ШК-3.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-3.2300.20Т	5±2	3/2300/20
д	ШК-4.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.700.20Т	5±2	4/700/20
д	ШК-4.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.850.20Т	5±2	4/850/20
д	ШК-4.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.1000.20Т	5±2	4/1000/20
д	ШК-4.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.1250.20Т	5±2	4/1250/20
д	ШК-4.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.1600.20Т	5±2	4/1600/20
д	ШК-4.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.1800.20Т	5±2	4/1800/20
д	ШК-4.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-4.2300.20Т	8±2	4/2300/20
д	ШК-5.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.700.20Т	5±2	5/700/20

д	ШК-5.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.850.20Т	5±2	5/850/20
д	ШК-5.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.1000.20Т	5±2	5/1000/20
д	ШК-5.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.1250.20Т	5±2	5/1250/20
д	ШК-5.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.1600.20Т	5±2	5/1600/20
д	ШК-5.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.1800.20Т	5±2	5/1800/20
д	ШК-5.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-5.2300.20Т	5±2	5/2300/20
д	ШК-6.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.700.20Т	5±2	6/700/20
д	ШК-6.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.850.20Т	5±2	6/850/20
д	ШК-6.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.1000.20Т	5±2	6/1000/20
д	ШК-6.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.1250.20Т	5±2	6/1250/20
д	ШК-6.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.1600.20Т	5±2	6/1600/20
д	ШК-6.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.1800.20Т	5±2	6/1800/20
д	ШК-6.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-6.2300.20Т	5±2	6/2300/20
д	ШК-10.100.40Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.100.40Т	5±2	10/100/40
д	ШК-10.700.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.700.20Т	5±2	10/700/20
д	ШК-10.850.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.850.20Т	5±2	10/850/20
д	ШК-10.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.1000.20Т	5±2	10/1000/20
д	ШК-10.1250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.1250.20Т	5±2	10/1250/20
д	ШК-10.1600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.1600.20Т	5±2	10/1600/20
д	ШК-10.1800.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.1800.20Т	5±2	10/1800/20
д	ШК-10.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШК-10.2300.20Т	5±2	10/2300/20
е	ШР-2.80.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.80.20Т	8±2	2/80/20
е	ШР-2.100.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.100.20Т	8±2	2/100/20
е	ШР-2.120.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.120.20Т	9±2	2/120/20
е	ШР-2.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.150.20Т	10±2	2/150/20
е	ШР-2.200.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.200.20Т	15±2	2/200/20

e	ШР-2.250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.250.20Т	18±2	2/250/20
e	ШР-2.300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.300.20Т	20±2	2/300/20
e	ШР-2.360.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.360.20Т	25±3	2/360/20
e	ШР-2.420.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.420.20Т	30±3	2/420/20
e	ШР-2.500.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.500.20Т	40±5	2/500/20
e	ШР-2.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-2.600.20Т	50±5	2/600/20
e	ШР-3.80.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.80.20Т	8±2	3/80/20
e	ШР-3.100.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.100.20Т	8±2	3/100/20
e	ШР-3.120.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.120.20Т	9±2	3/120/20
e	ШР-3.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.150.20Т	10±2	3/150/20
e	ШР-3.200.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.200.20Т	15±2	3/200/20
e	ШР-3.250.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.250.20Т	18±2	3/250/20
e	ШР-3.300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.300.20Т	20±2	3/300/20
e	ШР-3.360.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.360.20Т	25±3	3/360/20
e	ШР-3.420.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.420.20Т	30±3	3/420/20
e	ШР-3.500.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.500.20Т	40±5	3/500/20
e	ШР-3.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-3.600.20Т	50±5	3/600/20
e	ШР-4.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.80.30Т	8±2	4/80/30
e	ШР-4.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.100.30Т	8±2	4/100/30
e	ШР-4.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.120.30Т	9±2	4/120/30
e	ШР-4.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.150.30Т	10±2	4/150/30
e	ШР-4.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.200.30Т	15±2	4/200/30
e	ШР-4.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.250.30Т	18±2	4/250/30
e	ШР-4.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.300.30Т	20±2	4/300/30
e	ШР-4.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.360.30Т	25±3	4/360/30
e	ШР-4.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.420.30Т	30±3	4/420/30

e	ШР-4.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.500.30Т	40±5	4/500/30
e	ШР-4.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-4.600.30Т	50±5	4/600/30
e	ШР-5.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.80.30Т	8±2	5/80/30
e	ШР-5.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.100.30Т	8±2	5/100/30
e	ШР-5.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.120.30Т	9±2	5/120/30
e	ШР-5.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.150.30Т	10±2	5/150/30
e	ШР-5.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.200.30Т	15±2	5/200/30
e	ШР-5.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.250.30Т	18±2	5/250/30
e	ШР-5.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.300.30Т	20±2	5/300/30
e	ШР-5.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.360.30Т	25±3	5/360/30
e	ШР-5.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.420.30Т	30±3	5/420/30
e	ШР-5.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.500.30Т	40±5	5/500/30
e	ШР-5.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-5.600.30Т	50±5	5/600/30
e	ШР-6.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.80.30Т	8±2	6/80/30
e	ШР-6.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.100.30Т	8±2	6/100/30
e	ШР-6.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.120.30Т	9±2	6/120/30
e	ШР-6.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.150.30Т	10±2	6/150/30
e	ШР-6.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.200.30Т	15±2	6/200/30
e	ШР-6.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.250.30Т	18±2	6/250/30
e	ШР-6.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.300.30Т	20±2	6/300/30
e	ШР-6.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.360.30Т	25±3	6/360/30
e	ШР-6.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.420.30Т	30±3	6/420/30
e	ШР-6.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.500.30Т	40±5	6/500/30
e	ШР-6.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-6.600.30Т	50±5	6/600/30
e	ШР-7.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.80.30Т	8±2	7/80/30
e	ШР-7.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.100.30Т	8±2	7/100/30

e	ШР-7.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.120.30Т	9±2	7/120/30
e	ШР-7.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.150.30Т	10±2	7/150/30
e	ШР-7.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.200.30Т	15±2	7/200/30
e	ШР-7.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.250.30Т	18±2	7/250/30
e	ШР-7.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.300.30Т	20±2	7/300/30
e	ШР-7.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.360.30Т	25±3	7/360/30
e	ШР-7.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.420.30Т	30±3	7/420/30
e	ШР-7.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.500.30Т	40±5	7/500/30
e	ШР-7.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-7.600.30Т	50±5	7/600/30
e	ШР-8.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.80.30Т	8±2	8/80/30
e	ШР-8.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.100.30Т	8±2	8/100/30
e	ШР-8.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.120.30Т	9±2	8/120/30
e	ШР-8.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.150.30Т	10±2	8/150/30
e	ШР-8.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.200.30Т	15±2	8/200/30
e	ШР-8.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.250.30Т	18±2	8/250/30
e	ШР-8.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.300.30Т	20±2	8/300/30
e	ШР-8.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.360.30Т	25±3	8/360/30
e	ШР-8.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.420.30Т,	30±3	8/420/30
e	ШР-8.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.500.30Т	40±5	8/500/30
e	ШР-8.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-8.600.30Т	50±5	8/600/30
e	ШР-10.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.80.30Т	8±2	10/80/30
e	ШР-10.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.100.30Т	8±2	10/100/30
e	ШР-10.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.120.30Т	9±2	10/120/30
e	ШР-10.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.150.30Т	10±2	10/150/30
e	ШР-10.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.200.30Т	15±2	10/200/30
e	ШР-10.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.250.30Т	18±2	10/250/30

е	ШР-10.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.300.30Т	20±2	10/300/30
е	ШР-10.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.360.30Т	25±3	10/360/30
е	ШР-10.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.420.30Т	30±3	10/420/30
е	ШР-10.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.500.30Т	40±5	10/500/30
е	ШР-10.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-10.600.30Т	50±5	10/600/30
е	ШР-11.80.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.80.30Т	8±2	11/80/30
е	ШР-11.100.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.100.30Т	8±2	11/100/30
е	ШР-11.120.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.120.30Т	9±2	11/120/30
е	ШР-11.150.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.150.30Т	10±2	11/150/30
е	ШР-11.200.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.200.30Т,	15±2	11/200/30
е	ШР-11.250.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.250.30Т	18±2	11/250/30
е	ШР-11.300.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.300.30Т	20±2	11/300/30
е	ШР-11.360.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.360.30Т	25±3	11/360/30
е	ШР-11.420.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.420.30Т	30±3	11/420/30
е	ШР-11.500.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.500.30Т	40±5	11/500/30
е	ШР-11.600.30Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая, модели: ШР-11.600.30Т	50±5	11/600/30

Щетки с торцевым ворсом

ж	Ш-2.80.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.80.20	8±2	2/80/20
ж	Ш-2.100.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.100.20	8±2	2/100/20
ж	Ш-2.120.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.120.20	9±2	2/120/20
ж	Ш-2.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.150.20	10±2	2/150/20
ж	Ш-2.200.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.200.20	15±2	2/200/20
ж	Ш-2.250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.250.20	18±2	2/250/20
ж	Ш-2.300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.300.20	20±2	2/300/20
ж	Ш-2.360.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.360.20	25±3	2/360/20
ж	Ш-2.460.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.460.20	30±3	2/460/20
ж	Ш-2.500.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.500.20	40±5	2/500/20

ж	Ш-2.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-2.600.20	50±5	2/600/20
ж	Ш-3.80.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.80.20	8±2	3/80/20
ж	Ш-3.100.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.100.20	8±2	3/100/20
ж	Ш-3.120.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.120.20	9±2	3/120/20
ж	Ш-3.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.150.20	10±2	3/150/20
ж	Ш-3.200.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.200.20	15±2	3/200/20
ж	Ш-3.250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.250.20	18±2	3/250/20
ж	Ш-3.300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.300.20	20±2	3/300/20
ж	Ш-3.360.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.360.20	25±3	3/360/20
ж	Ш-3.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.460.30	30±3	3/460/30
ж	Ш-3.500.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.500.20	40±5	3/500/20
ж	Ш-3.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-3.600.20	50±5	3/600/20
ж	Ш-4.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.80.30	8±2	4/80/30
ж	Ш-4.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.100.30	8±2	4/100/30
ж	Ш-4.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.120.30	9±2	4/120/30
ж	Ш-4.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.150.30	10±2	4/150/30
ж	Ш-4.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.200.30	15±2	4/200/30
ж	Ш-4.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.250.30	18±2	4/250/30
ж	Ш-4.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.300.30	20±2	4/300/30
ж	Ш-4.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.360.30	25±3	4/360/30
ж	Ш-4.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.460.30	30±3	4/460/30
ж	Ш-4.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.500.30	40±5	4/500/30
ж	Ш-4.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-4.600.30	50±5	4/600/30
ж	Ш-5.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.80.30	8±2	5/80/30
ж	Ш-5.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.100.30	8±2	5/100/30
ж	Ш-5.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.120.30	9±2	5/120/30

ж	Ш-5.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.150.30	10±2	5/150/30
ж	Ш-5.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.200.30	15±2	5/200/30
ж	Ш-5.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.250.30	18±2	5/250/30
ж	Ш-5.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.300.30	20±2	5/300/30
ж	Ш-5.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.360.30	25±3	5/360/30
ж	Ш-5.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.460.30	30±3	5/460/30
ж	Ш-5.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.500.30	40±5	5/500/30
ж	Ш-5.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-5.600.30	50±5	5/600/30
ж	Ш-6.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.80.30	8±2	6/80/30
ж	Ш-6.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.100.30	8±2	6/100/30
ж	Ш-6.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.120.30	9±2	6/120/30
ж	Ш-6.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.150.30	10±2	6/150/30
ж	Ш-6.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.200.30	15±2	6/200/30
ж	Ш-6.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.250.30	18±2	6/250/30
ж	Ш-6.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.300.30	20±2	6/300/30
ж	Ш-6.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.360.30	25±3	6/360/30
ж	Ш-6.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.460.30	30±3	6/460/30
ж	Ш-6.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.500.30	40±5	6/500/30
ж	Ш-6.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-6.600.30	50±5	6/600/30
ж	Ш-7.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.80.30	8±2	7/80/30
ж	Ш-7.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.100.30	8±2	7/100/30
ж	Ш-7.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.120.30	9±2	7/120/30
ж	Ш-7.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.150.30	10±2	7/150/30
ж	Ш-7.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.200.30	15±2	7/200/30
ж	Ш-7.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.250.30	18±2	7/250/30
ж	Ш-7.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.300.30	20±2	7/300/30

ж	Ш-7.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.360.30	25±3	7/360/30
ж	Ш-7.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.460.30	30±3	7/460/30
ж	Ш-7.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.500.30	40±5	7/500/30
ж	Ш-7.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-7.600.30	50±5	7/600/30
ж	Ш-8.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.80.30	8±2	8/80/30
ж	Ш-8.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.100.30	8±2	8/100/30
ж	Ш-8.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.120.30	9±2	8/120/30
ж	Ш-8.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.150.30	10±2	8/150/30
ж	Ш-8.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.200.30	15±2	8/200/30
ж	Ш-8.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.250.30	18±2	8/250/30
ж	Ш-8.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.300.30	20±2	8/300/30
ж	Ш-8.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.360.30	25±3	8/360/30
ж	Ш-8.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.460.30	30±3	8/460/30
ж	Ш-8.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.500.30	40±5	8/500/30
ж	Ш-8.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-8.600.30	50±5	8/600/30
ж	Ш-10.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.80.30	8±2	10/80/30
ж	Ш-10.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.100.30	8±2	10/100/30
ж	Ш-10.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.120.30	9±2	10/120/30
ж	Ш-10.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.150.30	10±2	10/150/30
ж	Ш-10.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.200.30	15±2	10/200/30
ж	Ш-10.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.250.30	18±2	10/250/30
ж	Ш-10.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.300.30	20±2	10/300/30
ж	Ш-10.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.360.30	25±3	10/360/30
ж	Ш-10.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.460.30	30±3	10/460/30
ж	Ш-10.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.500.30	40±5	10/500/30
ж	Ш-10.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-10.600.30	50±5	10/600/30

ж	Ш-11.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.80.30	8±2	11/80/30
ж	Ш-11.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.100.30	8±2	11/100/30
ж	Ш-11.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.120.30	9±2	11/120/30
ж	Ш-11.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.150.30	10±2	11/150/30
ж	Ш-11.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.200.30	15±2	11/200/30
ж	Ш-11.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.250.30	18±2	11/250/30
ж	Ш-11.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.300.30	20±2	11/300/30
ж	Ш-11.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.360.30	25±3	11/360/30
ж	Ш-11.460.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.460.30	30±3	11/460/30
ж	Ш-11.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.500.30	40±5	11/500/30
ж	Ш-11.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-11.600.30	50±5	11/600/30
ж	Ш-15.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-15.150.30	50±5	15/150/30
ж	Ш-15.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-15.300.30	50±5	15/300/30
ж	Ш-15.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: Ш-15.600.30	50±5	15/600/30
з	ШР-2.80.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.80.20	8±2	2/80/20
з	ШР-2.100.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.100.20	8±2	2/100/20
з	ШР-2.120.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.120.20	9±2	2/120/20
з	ШР-2.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.150.20	10±2	2/150/20
з	ШР-2.200.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.200.20	15±2	2/200/20
з	ШР-2.250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.250.20	18±2	2/250/20
з	ШР-2.300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.300.20	20±2	2/300/20
з	ШР-2.360.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.360.20	25±3	2/360/20
з	ШР-2.420.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.420.20	30±3	2/420/20
з	ШР-2.500.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.500.20	40±5	2/500/20
з	ШР-2.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-2.600.20	50±5	2/600/20
з	ШР-3.80.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.80.20	8±2	3/80/20

3	ШР-3.100.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.100.20	8±2	3/100/20
3	ШР-3.120.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.120.20	9±2	3/120/20
3	ШР-3.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.150.20	10±2	3/150/20
3	ШР-3.200.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.200.20	15±2	3/200/20
3	ШР-3.250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.250.20	18±2	3/250/20
3	ШР-3.300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.300.20	20±2	3/300/20
3	ШР-3.360.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.360.20	25±3	3/360/20
3	ШР-3.420.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.420.20	30±3	3/420/20
3	ШР-3.500.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.500.20	40±5	3/500/20
3	ШР-3.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-3.600.20	50±5	3/600/20
3	ШР-4.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.80.30	8±2	4/80/30
3	ШР-4.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.100.30	8±2	4/100/30
3	ШР-4.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.120.30	9±2	4/120/30
3	ШР-4.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.150.30	10±2	4/150/30
3	ШР-4.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.200.30	15±2	4/200/30
3	ШР-4.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.250.30	18±2	4/250/30
3	ШР-4.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.300.30	20±2	4/300/30
3	ШР-4.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.360.30	25±3	4/360/30
3	ШР-4.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.420.30	30±3	4/420/30
3	ШР-4.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.500.30	40±5	4/500/30
3	ШР-4.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-4.600.30	50±5	4/600/30
3	ШР-5.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-5.80.30	8±2	5/80/30
3	ШР-5.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-5.100.30	8±2	5/100/30
3	ШР-5.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-5.120.30	9±2	5/120/30
3	ШР-5.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-5.150.30	10±2	5/150/30
3	ШР-5.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-5.200.30	15±2	5/200/30

3	ШР-5.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-5.250.30	18±2	5/250/30
3	ШР-5.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-5.300.30	20±2	5/300/30
3	ШР-5.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-5.420.30	30±3	5/420/30
3	ШР-5.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-5.500.30	40±5	5/500/30
3	ШР-5.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-5.600.30	50±5	5/600/30
3	ШР-6.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.80.30	8±2	6/80/30
3	ШР-6.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.100.30	8±2	6/100/30
3	ШР-6.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.120.30	9±2	6/120/30
3	ШР-6.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.150.30	10±2	6/150/30
3	ШР-6.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.200.30	15±2	6/200/30
3	ШР-6.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.250.30	18±2	6/250/30
3	ШР-6.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.300.30	20±2	6/300/30
3	ШР-6.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.360.30	25±3	6/360/30
3	ШР-6.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.420.30	30±3	6/420/30
3	ШР-6.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.500.30	40±5	6/500/30
3	ШР-6.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-6.600.30	50±5	6/600/30
3	ШР-7.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.80.30	8±2	7/80/30
3	ШР-7.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.100.30	8±2	7/100/30
3	ШР-7.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.120.30	9±2	7/120/30
3	ШР-7.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.150.30	10±2	7/150/30
3	ШР-7.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.200.30	15±2	7/200/30
3	ШР-7.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.250.30	18±2	7/250/30
3	ШР-7.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.300.30	20±2	7/300/30
3	ШР-7.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.360.30	25±3	7/360/30
3	ШР-7.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.420.30	30±3	7/420/30
3	ШР-7.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.500.30	40±5	7/500/30

3	ШР-7.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-7.600.30	50±5	7/600/30
3	ШР-8.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.80.30	8±2	8/80/30
3	ШР-8.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.100.30	8±2	8/100/30
3	ШР-8.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.120.30	9±2	8/120/30
3	ШР-8.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.150.30	10±2	8/150/30
3	ШР-8.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.200.30	15±2	8/200/30
3	ШР-8.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.250.30	18±2	8/250/30
3	ШР-8.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.300.30	20±2	8/300/30
3	ШР-8.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.360.30	25±3	8/360/30
3	ШР-8.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.420.30	30±3	8/420/30
3	ШР-8.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.500.30	40±5	8/500/30
3	ШР-8.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-8.600.30	50±5	8/600/30
3	ШР-10.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.80.30	8±2	10/80/30
3	ШР-10.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.100.30	8±2	10/100/30
3	ШР-10.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.120.30	9±2	10/120/30
3	ШР-10.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.150.30	10±2	10/150/30
3	ШР-10.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.200.30	15±2	10/200/30
3	ШР-10.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШР-10.250.30	18±2	10/250/30
3	ШР-10.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.300.30	20±2	10/300/30
3	ШР-10.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.360.30	25±3	10/360/30
3	ШР-10.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.420.30	30±3	10/420/30
3	ШР-10.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.500.30	40±5	10/500/30
3	ШР-10.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-10.600.30	50±5	10/600/30
3	ШР-11.80.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.80.30	8±2	11/80/30
3	ШР-11.100.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.100.30	8±2	11/100/30
3	ШР-11.120.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.120.30	9±2	11/120/30

3	ШР-11.150.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.150.30	10±2	11/150/30
3	ШР-11.200.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.200.30	15±2	11/200/30
3	ШР-11.250.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.250.30	18±2	11/250/30
3	ШР-11.300.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.300.30	20±2	11/300/30
3	ШР-11.360.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.360.30	25±3	11/360/30
3	ШР-11.420.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.420.30	30±3	11/420/30
3	ШР-11.500.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.500.30	40±5	11/500/30
3	ШР-11.600.30	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШР-11.600.30	50±5	11/600/30
и	ШК-2.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.700.20	5±2	2/700/20
и	ШК-2.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.850.20	5±2	2/850/20
и	ШК-2.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.1000.20	5±2	2/1000/20
и	ШК-2.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.1250.20	5±2	2/1250/20
и	ШК-2.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.1600.20	5±2	2/1600/20
и	ШК-2.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.1800.20	5±2	2/1800/20
и	ШК-2.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-2.2300.20	8±2	2/2300/20
и	ШК-3.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.700.20	5±2	3/700/20
и	ШК-3.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.850.30	5±2	3/850/20
и	ШК-3.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.1000.20	5±2	3/1000/20
и	ШК-3.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.1250.20	5±2	3/1250/20
и	ШК-3.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.1600.20	5±2	3/1600/20
и	ШК-3.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.1800.20	5±2	3/1800/20
и	ШК-3.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-3.2300.20	5±2	3/2300/20
и	ШК-4.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.700.20	5±2	4/700/20
и	ШК-4.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.850.50	5±2	4/850/20
и	ШК-4.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.1000.20	5±2	4/1000/20
и	ШК-4.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.1250.20	5±2	4/1250/20

и	ШК-4.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.1600.20	5±2	4/1600/20
и	ШК-4.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.1800.20	5±2	4/1800/20
и	ШК-4.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-4.2300.20	8±2	4/2300/20
и	ШК-5.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.700.20	5±2	5/700/20
и	ШК-5.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.850.50	5±2	5/850/20
и	ШК-5.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.1000.20	5±2	5/1000/20
и	ШК-5.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.1250.20	5±2	5/1250/20
и	ШК-5.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.1600.20	5±2	5/1600/20
и	ШК-5.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.1800.20	5±2	5/1800/20
и	ШК-5.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-5.2300.20	5±2	5/2300/20
и	ШК-6.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.700.20	5±2	6/700/20
и	ШК-6.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.850.50	5±2	6/850/80
и	ШК-6.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.1000.20	5±2	6/1000/20
и	ШК-6.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.1250.20	5±2	6/1250/20
и	ШК-6.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.1600.20	5±2	6/1600/20
и	ШК-6.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.1800.20	5±2	6/1800/20
и	ШК-6.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-6.2300.20	5±2	6/2300/20
и	ШК-10.100.40	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-10.100.40	5±2	10/100/40
и	ШК-10.700.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-10.700.20	5±2	10/700/20
и	ШК-10.850.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-10.850.20	5±2	10/850/20
и	ШК-10.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШК-10.1000.20	5±2	10/1000/20
и	ШК-10.1250.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШК-10.1250.20	5±2	10/1250/20
и	ШК-10.1600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШК-10.1600.20	5±2	10/1600/20
и	ШК-10.1800.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели: ШК-10.1800.20	5±2	10/1800/20
и	ШК-10.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, модели:ШК-10.2300.20	5±2	10/2300/20
Щетки с силиконовыми кольцами				
н	ШС-2.700.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели:	5±2	2/700/30

		ШС-2.700.30		
Н	ШС-2.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-2.1000.30	5±2	2/1000/30
Н	ШС-2.1200.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-2.1200.30	5±2	2/1200/30
Н	ШС-2.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-2.1650.30	5±2	2/1650/30
Н	ШС-2.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-2.1950.30	5±2	2/1950/30
Н	ШС-2.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-2.2300.30	5±2	2/2300/30
Н	ШС-3.700.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.700.30	5±2	3/700/30
Н	ШС-3.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.1000.30	5±2	3/1000/30
Н	ШС-3.1200.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.1200.30	5±2	3/1200/30
Н	ШС-3.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.1650.30	5±2	3/1650/30
Н	ШС-3.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.1950.30	5±2	3/1950/30
Н	ШС-3.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-3.2300.30	5±2	3/2300/30
Н	ШС-4.700.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.700.30	5±2	4/700/30
Н	ШС-4.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.1000.30	5±2	4/1000/30
Н	ШС-4.1200.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.1200.30	5±2	4/1200/30
Н	ШС-4.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.1650.30	5±2	4/1650/30
Н	ШС-4.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.1950.30	5±2	4/1950/30
Н	ШС-4.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-4.2300.30	5±2	4/2300/30
Н	ШС-5.700.30	Щетка для очистки инструментов, с	5±2	5/700/30

		силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.700.30		
Н	ШС-5.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.1000.30	5±2	5/1000/30
Н	ШС-5.1200.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.1200.30	5±2	5/1200/30
Н	ШС-5.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.1650.30	5±2	5/1650/30
Н	ШС-5.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.1950.30	5±2	5/1950/30
Н	ШС-5.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-5.2300.30	5±2	5/2300/30
Н	ШС-11.700.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.700.30	5±2	11/700/30
Н	ШС-11.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.1000.30	5±2	11/1000/30
Н	ШС-11.1200.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.1200.30	5±2	11/1200/30
Н	ШС-11.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.1650.30	5±2	11/1650/30
Н	ШС-11.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.1950.30	5±2	11/1950/30
Н	ШС-11.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, модели: ШС-11.2300.30	5±2	11/2300/30
Щетки пластиковые (тип зубная щетка)				
О	ШИ-75.220.15	Щетка для очистки инструментов, пластиковая, модели: ШИ-75.220.15	60±10	75/220/15
Щетки с металлической щетиной				
О	МШИ-55.180.12	Щетка для очистки инструментов, с металлической щетиной, модели: МШИ-55.180.12	30±5	55/180/12
О	МШИ-35.175.10	Щетка для очистки инструментов, с металлической щетиной, модели: МШИ-35.175.10	25±5	35/175/10
Двухсторонние				Габаритные размеры: общая длина l±5/ длина щетины l1±5/ диаметр щетины d1±0,2

				длина щетины 12±5/ диаметр щетины d2±0,2/ мм/мм/мм/мм/ мм
Щетки пластиковые (тип зубная щетка) двухсторонние				
п	ДШИ-11.220.14	Щетка для очистки инструментов, пластиковая, двухсторонняя, модели: ДШИ-11.220.14	30±5	220/30/11/45/14
Щетки торцевые двухсторонние				
к	ДШ-2.4.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.4.150.20Т	10±2	150/20/2/20/4
к	ДШ-2.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.150.20Т	10±2	150/20/2/20/2
к	ДШ-2.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.600.20Т	30±5	600/20/2/20/2
к	ДШ-2.900.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.900.20Т	5±2	900/20/2/20/2
к	ДШ-2.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.1000.20Т,	5±2	1000/20/2/20/2
к	ДШ-2.4.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.4.1650.20Т	5±2	1650/20/2/20/4
к	ДШ-2.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.1650.20Т	5±2	1650/20/2/20/2
к	ДШ-2.4.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.4.1950.20Т	5±2	1950/20/2/20/4
к	ДШ-2.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.1950.20Т	5±2	1950/20/2/20/2
к	ДШ-2.4.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.4.2300.20Т	5±2	2300/20/2/20/4
к	ДШ-2.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-2.2300.20Т	5±2	2300/20/2/20/2
к	ДШ-3.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.150.20Т	10±2	150/20/3/20/3
к	ДШ-3.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.600.20Т	30±5	600/20/3/20/3
к	ДШ-3.900.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.900.20Т	5±2	900/20/3/20/3
к	ДШ-3.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.1000.20Т	5±2	1000/20/3/20/3
к	ДШ-3.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.1650.20Т	5±2	1650/20/3/20/3
к	ДШ-3.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.1950.20Т	5±2	1950/20/3/20/3
к	ДШ-3.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-3.2300.20Т	5±2	2300/20/3/20/3
к	ДШ-5.10.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.10.150.20Т	10±2	150/20/5/20/10

к	ДШ-5.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.150.20Т	10±2	150/20/5/20/5
к	ДШ-5.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.600.20Т	30±5	600/20/5/20/5
к	ДШ-5.900.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.900.20Т	5±2	900/20/5/20/5
к	ДШ-5.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.1000.20Т	5±2	1000/20/5/20/5
к	ДШ-5.10.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.10.1650.20Т	5±2	1650/20/5/20/10
к	ДШ-5.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.1650.20Т	5±2	1650/20/5/20/5
к	ДШ-5.10.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.10.1950.20Т	5±2	1950/20/5/20/10
к	ДШ-5.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.1950.20Т	5±2	1950/20/5/20/5
к	ДШ-5.10.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.10.2300.20Т	5±2	2300/20/5/20/10
к	ДШ-5.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-5.2300.20Т	5±2	2300/20/5/20/5
к	ДШ-10.150.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.150.20Т	10±2	150/20/10/20/10
к	ДШ-10.600.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.600.20Т	30±5	600/20/10/20/10
к	ДШ-10.900.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.900.20Т	5±2	900/20/10/20/10
к	ДШ-10.1000.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.1000.20Т	5±2	1000/20/10/20/10
к	ДШ-10.1650.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.1650.20Т	5±2	1650/20/10/20/10
к	ДШ-10.1950.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.1950.20Т	5±2	1950/20/10/20/10
к	ДШ-10.2300.20Т	Щетка для очистки инструментов, торцевая двухсторонняя модели: ДШ-10.2300.20Т	5±2	2300/20/10/20/10
Щетки с торцевым ворсом двухсторонние				
л	ДШ-2.4.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.150.20	10±2	150/20/2/20/4
л	ДШ-2.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.150.20	10±2	150/20/2/20/2
л	ДШ-2.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.600.20	30±5	600/20/2/20/2
л	ДШ-2.900.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.900.20	5±2	900/20/2/20/2
л	ДШ-2.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1000.20	5±2	1000/20/2/20/2
л	ДШ-2.4.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.1650.20	5±2	1650/20/2/20/4

Л	ДШ-2.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1650.20	5±2	1650/20/2/20/2
Л	ДШ-2.4.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.1950.20	5±2	1950/20/2/20/4
Л	ДШ-2.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1950.20	5±2	1950/20/2/20/2
Л	ДШ-2.4.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.2300.20	5±2	2300/20/2/20/4
Л	ДШ-2.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-2.2300.20	5±2	2300/20/2/20/2
Л	ДШ-3.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.150.20	10±2	150/20/3/20/3
Л	ДШ-3.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.600.20	30±5	600/20/3/20/3
Л	ДШ-3.900.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.900.20	5±2	900/20/3/20/3
Л	ДШ-3.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1000.20	5±2	1000/20/3/20/3
Л	ДШ-3.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1650.20	5±2	1650/20/3/20/3
Л	ДШ-3.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1950.20	5±2	1950/20/3/20/3
Л	ДШ-3.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-3.2300.20	5±2	2300/20/3/20/3
Л	ДШ-5.10.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.150.20	10±2	150/20/5/20/10
Л	ДШ-5.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.150.20	10±2	150/20/5/20/5
Л	ДШ-5.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.600.20	30±5	600/20/5/20/5
Л	ДШ-5.900.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.900.20	5±2	900/20/5/20/5
Л	ДШ-5.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1000.20	5±2	1000/20/5/20/5
Л	ДШ-5.10.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели:	5±2	1650/20/5/20/


		ДШ-5.10.1650.20		10
л	ДШ-5.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1650.20	5±2	1650/20/5/20
л	ДШ-5.10.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.1950.20	5±2	1950/20/5/20/10
л	ДШ-5.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1950.20	5±2	1950/20/5/20/5
л	ДШ-5.10.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.2300.20	5±2	2300/20/5/20/10
л	ДШ-5.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-5.2300.20	5±2	2300/20/5/20/5
л	ДШ-10.150.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.150.20	10±2	150/20/10/20/10
л	ДШ-10.600.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.600.20	30±5	600/20/10/20/10
л	ДШ-10.900.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.900.20	5±2	900/20/10/20/10
л	ДШ-10.1000.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1000.20	5±2	1000/20/10/20/10
л	ДШ-10.1650.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1650.20	5±2	1650/20/10/20/10
л	ДШ-10.1950.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1950.20	5±2	1950/20/10/20/10
л	ДШ-10.2300.20	Щетка для очистки инструментов, с торцевым ворсом, двухсторонняя, модели: ДШ-10.2300.20	5±2	2300/20/10/20/10
Щетки с наконечником двухсторонние				
м	ДШ-2.4.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.150.20Н	10±2	150/20/2/20/4
м	ДШ-2.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.150.20Н	10±2	150/20/2/20/2
м	ДШ-2.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.600.20Н	30±5	600/20/2/20/2
м	ДШ-2.900.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.900.20Н	5±2	900/20/2/20/2
м	ДШ-2.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1000.20Н	5±2	1000/20/2/20/2

М	ДШ-2.4.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.1650.20Н	5±2	1650/20/2/20/4
М	ДШ-2.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1650.20Н	5±2	1650/20/2/20/2
М	ДШ-2.4.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.1950.20Н	5±2	1950/20/2/20/4
М	ДШ-2.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.1950.20Н	5±2	1950/20/2/20/2
М	ДШ-2.4.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.4.2300.20Н	5±2	2300/20/2/20/4
М	ДШ-2.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-2.2300.20Н	5±2	2300/20/2/20/2
М	ДШ-3.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.150.20Н	10±2	150/20/3/20/3
М	ДШ-3.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.600.20Н	30±5	600/20/3/20/3
М	ДШ-3.900.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.900.20Н	5±2	900/20/3/20/3
М	ДШ-3.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1000.20Н	5±2	1000/20/3/20/3
М	ДШ-3.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1650.20Н	5±2	1650/20/3/20/3
М	ДШ-3.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.1950.20Н	5±2	1950/20/3/20/3
М	ДШ-3.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-3.2300.20Н	5±2	2300/20/3/20/3
М	ДШ-5.10.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.150.20Н	10±2	150/20/5/20/10
М	ДШ-5.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.150.20Н	10±2	150/20/5/20/5
М	ДШ-5.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.600.20Н	30±5	600/20/5/20/5
М	ДШ-5.900.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.900.20Н	5±2	900/20/5/20/5
М	ДШ-5.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1000.20Н	5±2	1000/20/5/20/5
М	ДШ-5.10.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели:	5±2	1650/20/5/20/10


		ДШ-5.10.1650.20Н		
М	ДШ-5.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1650.20Н	5±2	1650/20/5/20/5
М	ДШ-5.10.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.1950.20Н	5±2	1950/20/5/20/10
М	ДШ-5Т.10Н.1950.20.60	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5Т.10Н.1950.20.60	5±2	1950/20/5/60/10
М	ДШ-5.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.1950.20Н	5±2	1950/20/5/20/5
М	ДШ-5.10.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.10.2300.20Н	5±2	2300/20/5/20/10
М	ДШ-5.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-5.2300.20Н	5±2	2300/20/5/20/5
М	ДШ-10.150.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.150.20Н	10±2	150/20/10/20/10
М	ДШ-10.600.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.600.20Н	30±5	600/20/10/20/10
М	ДШ-10.900.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.900.20Н	5±2	900/20/10/20/10
М	ДШ-10.1000.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1000.20Н	5±2	1000/20/10/20/10
М	ДШ-10.1650.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1650.20Н	5±2	1650/20/10/20/10
М	ДШ-10.1950.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.1950.20Н	5±2	1950/20/10/20/10
М	ДШ-10.2300.20Н	Щетка для очистки инструментов, с наконечником, двухсторонняя, модели: ДШ-10.2300.20Н	5±2	2300/20/10/20/10
Щетки с силиконовыми кольцами двухсторонние				
Р	ДШС-5.900.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.900.30	6±2	900/30/5/30/5
Р	ДШС-5.1000.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.1000.30	6±2	1000/30/5/30/5
Р	ДШС-5.1650.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.1650.30	6±2	1650/30/5/30/5
Р	ДШС-5.1950.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.1950.30	6±2	1950/30/5/30/5
Р	ДШС-5.2300.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.2300.30	6±2	2300/30/5/30/5

		модели: ДШС-5.2300.30		
р	ДШС-5.2400.30	Щетка для очистки инструментов, с силиконовыми кольцами, двухсторонняя, модели: ДШС-5.2400.30	6±2	2400/30/5/30/5
Щетка-губка				
с	ШГ-5	Щетка-губка для очистки инструментов, модели: ШГ-5	6±2	97/55/5
с	ШГ-10	Щетка-губка для очистки инструментов, модели: ШГ-10	6±2	100/55/10


Рисунок 1

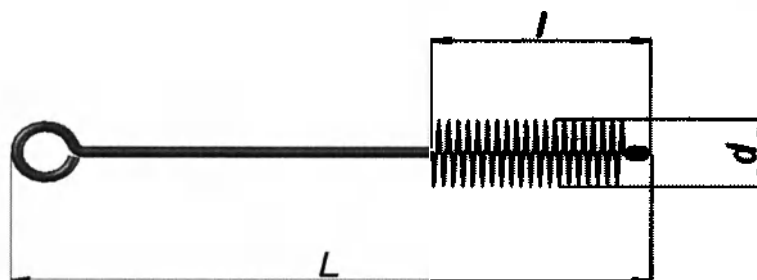


а.) Щетки с наконечником

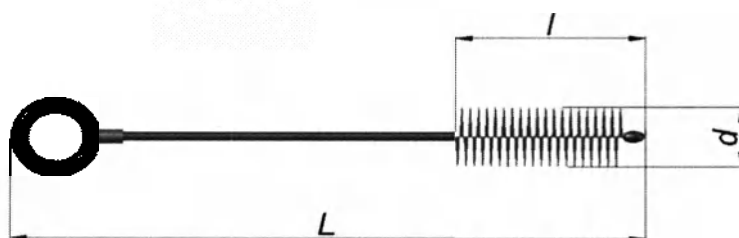


б.) Щетки с наконечником

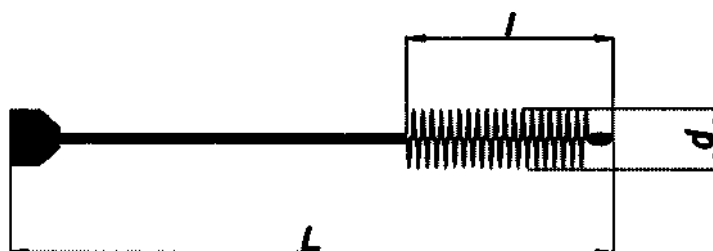


в.) Щетки с наконечником

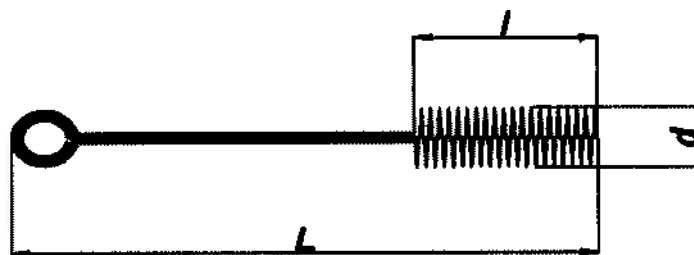


г.) Щетки торцевые

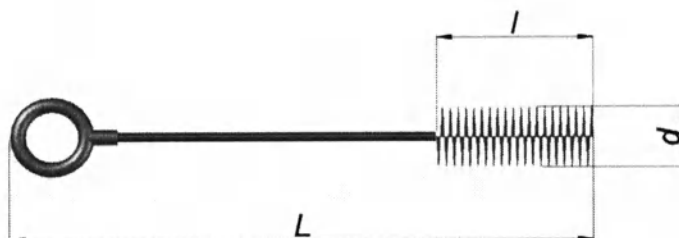


д.) Щетки торцевые

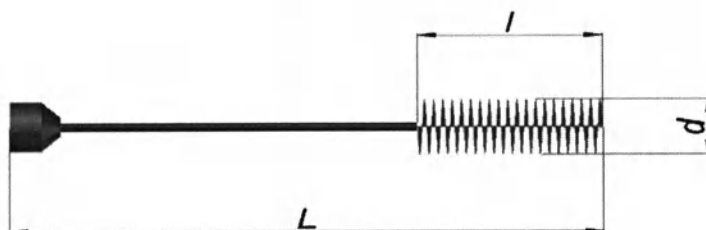


е.) Щетки торцевые

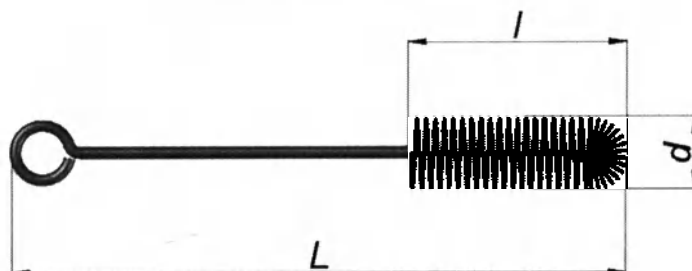


ж.) Щетки с торцевым ворсом

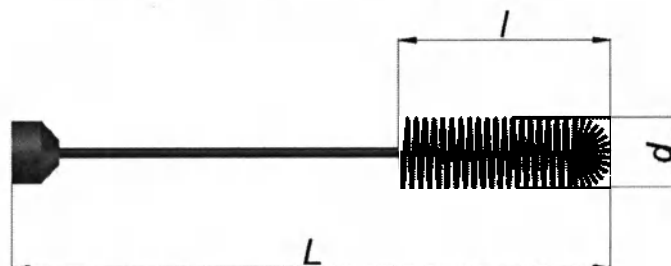


з.) Щетки с торцевым ворсом

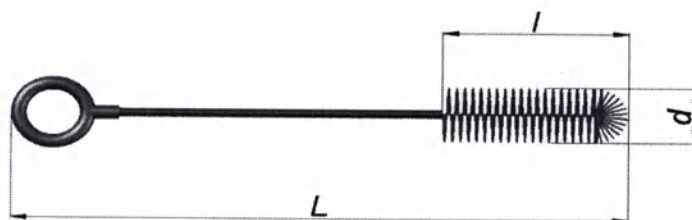

и.) Щетки с торцевым ворсом

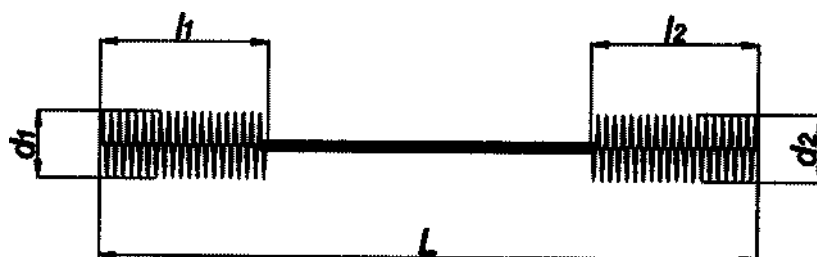


к.) Щетки торцевые двухсторонние

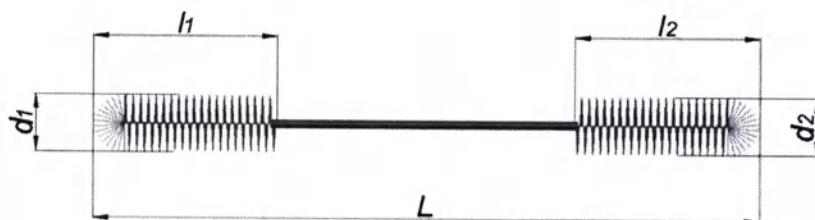


л.) Щетки с торцевым ворсом двухсторонние




м.) Щетки с наконечником двухсторонние

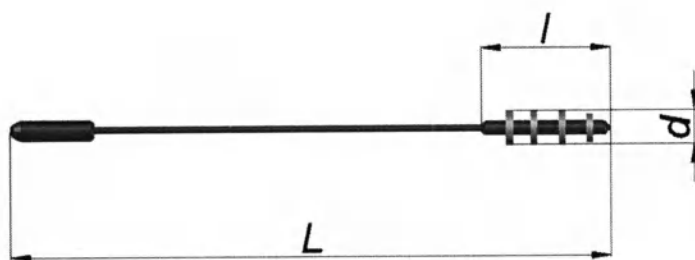


н.) Щетки с силиконовыми кольцами

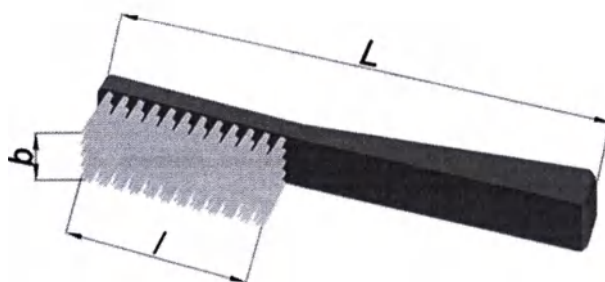


о.) Щетки пластиковые (тип зубная щетка);
Щетки с металлической щетиной

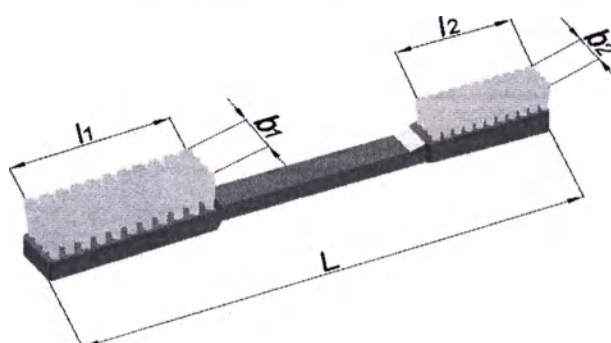

п.) Щетки пластиковые (тип зубная щетка) двусторонние

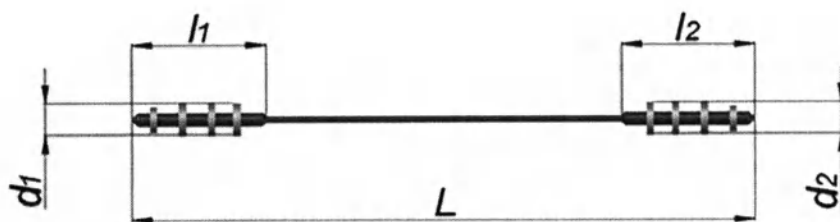

р.) Щетки с силиконовыми кольцами двухсторонние

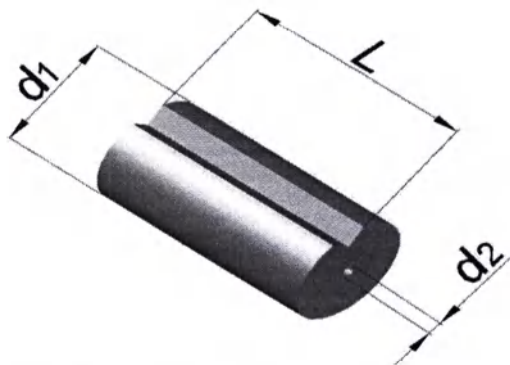

с.) Щетка-губка

Приложение 1

Структура обозначения щеток для очистки инструментов



Директор ООО «ИВФ «Медфармсервис»



Чукарин А.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
45 (сорок пять) листов

Директор ООО «ИВФ «Медфармсервис»
А.В. Чукарин

« 12 » 07 2020г.

