

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «РАДМИРС»



Перевозчикова Н.Е
2020 г.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
медицинского изделия

«Устройство внутрикостного канюлирования (УВК М) по ТУ 32.50.13-004-16203171-2019»

производства ООО «АВТОМ», Россия

Фотографии



Фото 1 – УВК М-1-1,28-10ж

Фото 2 – YBK M-1,28-17к





Фото 3 – УБК М-1-1,8-26с

РАДИМИРС

**Устройство
внутрикостного
канюлирования**



☒ УБК М-1-1,28-10Ж-1
УБК М-1-1,28-10Ж-2
Диаметр иглы 1,28 мм (G18), Длина иглы 10 мм (для детей до 3-х лет) цвет ручки желтый



☐ УБК М-1-1,28-17К-1
УБК М-1-1,28-17К-2
Диаметр иглы 1,28 мм (G18), Длина иглы 17 мм (для детей до 12-ти лет) цвет ручки красный



☐ УБК М-1-1,8-26С-1
УБК М-1-1,8-26С-2
Диаметр иглы 1,8 мм (G15), Длина иглы 26 мм (для взрослых) цвет ручки синий

1 Проверим целостность упаковок, маркировку, соответствие изделия возрасту пациента.

2 Вскрываем наружную защитную оболочку, достаем устройство для ознобления.

3 Извлекаем изделие из упаковки.

4 Ослабляем изделие, убирается в отступив механических повреждений.



11 **12** **13** **14**

Потрущим иглу < манярен-спилем до жаканя опорной площадки канюли < **Удерживая за канюлю** иглы и преодолевая легкое сопротивление стопора, извлекаем мандрен из провета **Покосим иглу шприц, вводя 20 мл физиологического раствора** и проводим ее по канюле до открытия интратканевого канала и всей процедуры.

Фото 4 – УБК М-1-1,28-10ж-1



Устройство внутрикостного канюлирования



☐ UVK M-1-1,28-10Ж-1

☐ UVK M-1-1,28-10Ж-2

диаметр иглы
1,28 мм (G18), длина
иглы 10 мм (для детей
до 3-х лет) цвет ручки
желтый



☒ UVK M-1-1,28-17К-1

☐ UVK M-1-1,28-17К-2

диаметр иглы
1,28 мм (G18), длина
иглы 17 мм (для детей
до 12-ти лет) цвет ручки
красный



☐ UVK M-1-1,8-26С-1

☐ UVK M-1-1,8-26С-2

диаметр иглы
1,8 мм (G15), длина иглы
26 мм (для взрослых)
цвет ручки синий



Проверяем целост-
ность упаковки, мар-
кировку, соответствие
изделия возрасту
пациента.



Вскрываем наружную
защитную упаковку,
достаем изделие,
инструкцию для
ознакомления.




Извлекаем изделие из
внутренней упаковки.



Осматриваем изделие,
убеждаемся в отсут-
ствии механических
повреждений.



Погружаем иглу с
манжетой-стiletом
до касания опорной
пластинки канюли с
кожей.

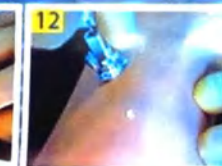

Удерживая за канюлю
иглы и преодолевая
легкое сопротивление
стопора, извлекаем
манжету из просвета
иглы.



Подсоединяем шприц, вводим 20 мл физиологичес-
кого раствора, необходимо для открытия инфузионного канала и
всей процедуры.





Устройство внутрикостного канюлирования



☐ УВК М-1-1,28-10Ж-1

☐ УВК М-1-1,28-10Ж-2

диаметр иглы
1,28 мм (G18), длина
иглы 10 мм (для детей
до 3-х лет) цвет ручки
желтый



☐ УВК М-1-1,28-17К-1

☐ УВК М-1-1,28-17К-2

диаметр иглы
1,28 мм (G18), длина
иглы 17 мм (для детей
до 12-ти лет) цвет ручки
красный



☒ УВК М-1-1,8-26С-1

☐ УВК М-1-1,8-26С-2

диаметр иглы
1,8 мм (G15), длина иглы
26 мм (для взрослых)
цвет ручки синий



Проверяем целост-
ность упаковки, мар-
кировку, соответствие
изделия возрасту
пациента.



Вскрываем наружную
защитную упаковку,
достаем крайнюю
индивидуальную для
ознакомления.



Извлекаем изделие из
внутренней упаковки.



Осматриваем изделие,
убеждаемся в отсут-
ствии механических
повреждений.



Погружаем иглу с
мандрен-стидетом
до касания опорной
площадки канюли с
кожей.



Удерживая за канюлю
иглы и преодолевая
легкое сопротивление
стопа, извлекаем
мандрен из просвета
иглы.



Подсоединяем шприц, вводим 20 мл физиологичес-
кого раствора. Необходимо для открытия инфузионного канала и
всей процедуры.







Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (тринадцать) листов
цифрами прописью

Должность Директор

Подпись И.И.И. И.И.И. | м.п.

28 апреля 2020

