

«УТВЕРЖДАЮ» / “APPROVE”
SFM Hospital Products GmbH GmbH/

СФМ Госпитал Продактс ГмбХ


Managing Director /

Управляющий Директор

(Должность/position)

Lindner Vera/Вера Линднер

(Имя/name)

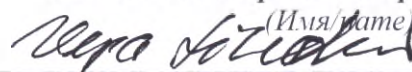

(подпись/signature)

«05» февраля 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM

Наименование медицинского изделия:

Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM, в вариантах исполнения:

1. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,2мм х 3мм; 0,2мм х 4мм; 0,2мм х 5мм; 0,2мм х 6мм; 0,2мм х 7мм; 0,2мм х 8 мм; 0,2мм х 9 мм; 0,2мм х 10мм; 0,2мм х 11мм; 0,2мм х 12мм; 0,2мм х 12,7 мм; 0,2мм х 13мм; 0,2мм х 14мм; 0,2мм х 15мм; 0,2мм х 16мм; 0,2мм х 17мм; 0,2мм х 18мм; 0,2мм х 19мм; 0,2мм х 20мм; 0,2мм х 25мм; 0,2мм х 30мм; 0,2мм х 32мм; 0,2мм х 38мм; 0,2мм х 40мм; 0,2мм х 50мм; 0,2мм х 60 мм; 0,2мм х 70мм; 0,2мм х 80мм; 0,2мм х 100мм; 0,2мм х 120мм; 0,2мм х 140мм; 0,2мм х 150мм; 0,2мм х 200мм; 7.
2. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,23мм х 3мм; 0,23мм х 4мм; 0,23мм х 5мм; 0,23мм х 6мм; 0,23мм х 7мм; 0,23мм х 8 мм; 0,23мм х 9 мм; 0,23мм х 10мм; 0,23мм х 11мм; 0,23мм х 12мм; 0,23мм х 12,7 мм; 0,23мм х 13мм; 0,23мм х 14мм; 0,23мм х 15мм; 0,23мм х 16мм; 0,23мм х 17мм; 0,23мм х 18мм; 0,23мм х 19мм; 0,23мм х 20мм; 0,23мм х 25мм; 0,23мм х 30мм; 0,23мм х 32мм; 0,23мм х 38мм; 0,23мм х 40мм; 0,23мм х 50мм; 0,23мм х 60 мм; 0,23мм х 70мм; 0,23мм х 80мм; 0,23мм х 100мм; 0,23мм х 120мм; 0,23мм х 140мм; 0,23мм х 150мм; 0,23мм х 200мм; 8.
3. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,25мм х 3мм; 0,25мм х 4мм; 0,25мм х 5мм; 0,25мм х 6мм; 0,25мм х 7мм; 0,25мм х 8 мм; 0,25мм х 9 мм; 0,25мм х 10мм; 0,25мм х 11мм; 0,25мм х 12мм; 0,25мм х 12,7 мм; 0,25мм х 13мм; 0,25мм х 14мм; 0,25мм х 15мм; 0,25мм х 16мм; 0,25мм х 17мм; 0,25мм х 18мм; 0,25мм х 19мм; 0,25мм х 20мм; 0,25мм х 25мм; 0,25мм х 30мм; 0,25мм х 32мм; 0,25мм х 38мм; 0,25мм х 40мм; 0,25мм х 50мм; 0,25мм х 60 мм; 0,25мм х 70мм; 0,25мм х 80мм; 0,25мм х 100мм; 0,25мм х 120мм; 0,25мм х 140мм; 0,25мм х 150мм; 0,25мм х 200мм; 9.
4. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,26мм х 3мм; 0,26мм х 4мм; 0,26мм х 5мм; 0,26мм х 6мм; 0,26мм х 7мм; 0,26мм х 8 мм; 0,26мм х 9 мм; 0,26мм х 10мм; 0,26мм х 11мм; 0,26мм х 12мм; 0,26мм х 12,7 мм; 0,26мм х 13мм; 0,26мм х 14мм; 0,26мм х 15мм; 0,26мм х 16мм; 0,26мм х 17мм; 0,26мм х 18мм; 0,26мм х 19мм; 0,26мм х 20мм; 0,26мм х 25мм; 0,26мм х 30мм; 0,26мм х 32мм; 0,26мм х 38мм; 0,26мм х 40мм; 0,26мм х 50мм; 0,26мм х 60 мм; 0,26мм х 70мм; 0,26мм х 80мм; 0,26мм х 100мм; 0,26мм х 120мм; 0,26мм х 140мм; 0,26мм х 150мм; 0,26мм х 200мм; 10.
5. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,29мм х 3мм; 0,29мм х 4мм; 0,29мм х 5мм; 0,29мм х 6мм; 0,29мм х 7мм; 0,29мм х 8 мм; 0,29мм х 9 мм; 0,29мм х 10мм; 0,29мм х 11мм; 0,29мм х 12мм; 0,29мм х 12,7 мм; 0,29мм х 13мм; 0,29мм х 14мм; 0,29мм х 15мм; 0,29мм х 16мм; 0,29мм х 17мм; 0,29мм х 18мм; 0,29мм х 19мм; 0,29мм х 20мм; 0,29мм х 25мм; 0,29мм х 30мм; 0,29мм х 32мм; 0,29мм х 38мм; 0,29мм х 40мм; 0,29мм х 50мм; 0,29мм х 60 мм; 0,29мм х 70мм; 0,29мм х 80мм; 0,29мм х 100мм; 0,29мм х 120мм; 0,29мм х 140мм; 0,29мм х 150мм; 0,29мм х 200мм; 11.

6. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,30мм x 3мм; 0,30мм x 4мм; 0,30мм x 5мм; 0,30мм x 6мм; 0,30мм x 7мм; 0,30мм x 8 мм; 0,30мм x 9 мм; 0,30мм x 10мм; 0,30мм x 11мм; 0,30мм x 12мм; 0,30мм x 12,7 мм; 0,30мм x 13мм; 0,30мм x 14мм; 0,30мм x 15мм; 0,30мм x 16мм; 0,30мм x 17мм; 0,30мм x 18мм; 0,30мм x 19мм; 0,30мм x 20мм; 0,30мм x 25мм; 0,30мм x 30мм; 0,30мм x 32мм; 0,30мм x 38мм; 0,30мм x 40мм; 0,30мм x 50мм; 0,30мм x 60 мм; 0,30мм x 70мм; 0,30мм x 80мм; 0,30мм x 100мм; 0,30мм x 120мм; 0,30мм x 140мм; 0,30мм x 150мм; 0,30мм x 200мм;
7. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,33мм x 3мм; 0,33мм x 4мм; 0,33мм x 5мм; 0,33мм x 6мм; 0,33мм x 7мм; 0,33мм x 8 мм; 0,33мм x 9 мм; 0,33мм x 10мм; 0,33мм x 11мм; 0,33мм x 12мм; 0,33мм x 12,7 мм; 0,33мм x 13мм; 0,33мм x 14мм; 0,33мм x 15мм; 0,33мм x 16мм; 0,33мм x 17мм; 0,33мм x 18мм; 0,33мм x 19мм; 0,33мм x 20мм; 0,33мм x 25мм; 0,33мм x 30мм; 0,33мм x 32мм; 0,33мм x 38мм; 0,33мм x 40мм; 0,33мм x 50мм; 0,33мм x 60 мм; 0,33мм x 70мм; 0,33мм x 80мм; 0,33мм x 100мм; 0,33мм x 120мм; 0,33мм x 140мм; 0,33мм x 150мм; 0,33мм x 200мм;
8. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,40мм x 3мм; 0,40мм x 4мм; 0,40мм x 5мм; 0,40мм x 6мм; 0,40мм x 7мм; 0,40мм x 8 мм; 0,40мм x 9 мм; 0,40мм x 10мм; 0,40мм x 11мм; 0,40мм x 12мм; 0,40мм x 12,7 мм; 0,40мм x 13мм; 0,40мм x 14мм; 0,40мм x 15мм; 0,40мм x 16мм; 0,40мм x 17мм; 0,40мм x 18мм; 0,40мм x 19мм; 0,40мм x 20мм; 0,40мм x 25мм; 0,40мм x 30мм; 0,40мм x 32мм; 0,40мм x 38мм; 0,40мм x 40мм; 0,40мм x 50мм; 0,40мм x 60 мм; 0,40мм x 70мм; 0,40мм x 80мм; 0,40мм x 100мм; 0,40мм x 120мм; 0,40мм x 140мм; 0,40мм x 150мм; 0,40мм x 200мм;
9. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,45мм x 3мм; 0,45мм x 4мм; 0,45мм x 5мм; 0,45мм x 6мм; 0,45мм x 7мм; 0,45мм x 8 мм; 0,45мм x 9 мм; 0,45мм x 10мм; 0,45мм x 11мм; 0,45мм x 12мм; 0,45мм x 12,7 мм; 0,45мм x 13мм; 0,45мм x 14мм; 0,45мм x 15мм; 0,45мм x 16мм; 0,45мм x 17мм; 0,45мм x 18мм; 0,45мм x 19мм; 0,45мм x 20мм; 0,45мм x 25мм; 0,45мм x 30мм; 0,45мм x 32мм; 0,45мм x 38мм; 0,45мм x 40мм; 0,45мм x 50мм; 0,45мм x 60 мм; 0,45мм x 70мм; 0,45мм x 80мм; 0,45мм x 100мм; 0,45мм x 120мм; 0,45мм x 140мм; 0,45мм x 150мм; 0,45мм x 200мм;
10. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,50мм x 3мм; 0,50мм x 4мм; 0,50мм x 5мм; 0,50мм x 6мм; 0,50мм x 7мм; 0,50мм x 8 мм; 0,50мм x 9 мм; 0,50мм x 10мм; 0,50мм x 11мм; 0,50мм x 12мм; 0,50мм x 12,7 мм; 0,50мм x 13мм; 0,50мм x 14мм; 0,50мм x 15мм; 0,50мм x 16мм; 0,50мм x 17мм; 0,50мм x 18мм; 0,50мм x 19мм; 0,50мм x 20мм; 0,50мм x 25мм; 0,50мм x 30мм; 0,50мм x 32мм; 0,50мм x 38мм; 0,50мм x 40мм; 0,50мм x 50мм; 0,50мм x 60 мм; 0,50мм x 70мм; 0,50мм x 80мм; 0,50мм x 100мм; 0,50мм x 120мм; 0,50мм x 140мм; 0,50мм x 150мм; 0,50мм x 200мм;
11. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,55мм x 3мм; 0,55мм x 4мм; 0,55мм x 5мм; 0,55мм x 6мм; 0,55мм x 7мм; 0,55мм x 8 мм; 0,55мм x 9 мм; 0,55мм x 10мм; 0,55мм x 11мм; 0,55мм x 12мм; 0,55мм x 12,7 мм; 0,55мм x 13мм; 0,55мм x 14мм; 0,55мм x 15мм; 0,55мм x 16мм; 0,55мм x 17мм; 0,55мм x 18мм; 0,55мм x 19мм; 0,55мм x 20мм; 0,55мм x 25мм; 0,55мм x 30мм; 0,55мм x 32мм; 0,55мм x 38мм; 0,55мм x 40мм; 0,55мм x 50мм; 0,55мм x 60 мм; 0,55мм

х 70мм; 0,55мм х 80мм; 0,55мм х 100мм; 0,55мм х 120мм; 0,55мм х 140мм; 0,55мм х 150мм; 0,55мм х 200мм;

12. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,60мм х 3мм; 0,60мм х 4мм; 0,60мм х 5мм; 0,60мм х 6мм; 0,60мм х 7мм; 0,60мм х 8 мм; 0,60мм х 9 мм; 0,60мм х 10мм; 0,60мм х 11мм; 0,60мм х 12мм; 0,60мм х 12,7 мм; 0,60мм х 13мм; 0,60мм х 14мм; 0,60мм х 15мм; 0,60мм х 16мм; 0,60мм х 17мм; 0,60мм х 18мм; 0,60мм х 19мм; 0,60мм х 20мм; 0,60мм х 25мм; 0,60мм х 30мм; 0,60мм х 32мм; 0,60мм х 38мм; 0,60мм х 40мм; 0,60мм х 50мм; 0,60мм х 60 мм; 0,60мм х 70мм; 0,60мм х 80мм; 0,60мм х 100мм; 0,60мм х 120мм; 0,60мм х 140мм; 0,60мм х 150мм; 0,60мм х 200мм; 8.
13. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,70мм х 3мм; 0,70мм х 4мм; 0,70мм х 5мм; 0,70мм х 6мм; 0,70мм х 7мм; 0,70мм х 8 мм; 0,70мм х 9 мм; 0,70мм х 10мм; 0,70мм х 11мм; 0,70мм х 12мм; 0,70мм х 12,7 мм; 0,70мм х 13мм; 0,70мм х 14мм; 0,70мм х 15мм; 0,70мм х 16мм; 0,70мм х 17мм; 0,70мм х 18мм; 0,70мм х 19мм; 0,70мм х 20мм; 0,70мм х 25мм; 0,70мм х 30мм; 0,70мм х 32мм; 0,70мм х 38мм; 0,70мм х 40мм; 0,70мм х 50мм; 0,70мм х 60 мм; 0,70мм х 70мм; 0,70мм х 80мм; 0,70мм х 100мм; 0,70мм х 120мм; 0,70мм х 140мм; 0,70мм х 150мм; 0,70мм х 200мм; 9.
14. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,80мм х 3мм; 0,80мм х 4мм; 0,80мм х 5мм; 0,80мм х 6мм; 0,80мм х 7мм; 0,80мм х 8 мм; 0,80мм х 9 мм; 0,80мм х 10мм; 0,80мм х 11мм; 0,80мм х 12мм; 0,80мм х 12,7 мм; 0,80мм х 13мм; 0,80мм х 14мм; 0,80мм х 15мм; 0,80мм х 16мм; 0,80мм х 17мм; 0,80мм х 18мм; 0,80мм х 19мм; 0,80мм х 20мм; 0,80мм х 25мм; 0,80мм х 30мм; 0,80мм х 32мм; 0,80мм х 38мм; 0,80мм х 40мм; 0,80мм х 50мм; 0,80мм х 60 мм; 0,80мм х 70мм; 0,80мм х 80мм; 0,80мм х 100мм; 0,80мм х 120мм; 0,80мм х 140мм; 0,80мм х 150мм; 0,80мм х 200мм; 1.
15. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 0,90мм х 3мм; 0,90мм х 4мм; 0,90мм х 5мм; 0,90мм х 6мм; 0,90мм х 7мм; 0,90мм х 8 мм; 0,90мм х 9 мм; 0,90мм х 10мм; 0,90мм х 11мм; 0,90мм х 12мм; 0,90мм х 12,7 мм; 0,90мм х 13мм; 0,90мм х 14мм; 0,90мм х 15мм; 0,90мм х 16мм; 0,90мм х 17мм; 0,90мм х 18мм; 0,90мм х 19мм; 0,90мм х 20мм; 0,90мм х 25мм; 0,90мм х 30мм; 0,90мм х 32мм; 0,90мм х 38мм; 0,90мм х 40мм; 0,90мм х 50мм; 0,90мм х 60 мм; 0,90мм х 70мм; 0,90мм х 80мм; 0,90мм х 100мм; 0,90мм х 120мм; 0,90мм х 140мм; 0,90мм х 150мм; 0,90мм х 200мм; 12.
16. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 1,0мм х 3мм; 1,0мм х 4мм; 1,0мм х 5мм; 1,0мм х 6мм; 1,0мм х 7мм; 1,0мм х 8 мм; 1,0мм х 9 мм; 1,0мм х 10мм; 1,0мм х 11мм; 1,0мм х 12мм; 1,0мм х 12,7 мм; 1,0мм х 13мм; 1,0мм х 14мм; 1,0мм х 15мм; 1,0мм х 16мм; 1,0мм х 17мм; 1,0мм х 18мм; 1,0мм х 19мм; 1,0мм х 20мм; 1,0мм х 25мм; 1,0мм х 30мм; 1,0мм х 32мм; 1,0мм х 38мм; 1,0мм х 40мм; 1,0мм х 50мм; 1,0мм х 60 мм; 1,0мм х 70мм; 1,0мм х 80мм; 1,0мм х 100мм; 1,0мм х 120мм; 1,0мм х 140мм; 1,0мм х 150мм; 1,0мм х 200мм; 13.
17. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 1,1мм х 3мм; 1,1мм х 4мм; 1,1мм х 5мм; 1,1мм х 6мм; 1,1мм х 7мм; 1,1мм х 8 мм; 1,1мм х 9 мм; 1,1мм х 10мм; 1,1мм х 11мм; 1,1мм х 12мм; 1,1мм х 12,7 мм; 1,1мм х 13мм; 1,1мм х 14мм; 1,1мм х 15мм; 1,1мм х 16мм; 1,1мм х

- 17мм; 1,1мм x 18мм; 1,1мм x 19мм; 1,1мм x 20мм; 1,1мм x 25мм; 1,1мм x 30мм; 1,1мм x 32мм; 1,1мм x 38мм; 1,1мм x 40мм; 1,1мм x 50мм; 1,1мм x 60 мм; 1,1мм x 70мм; 1,1мм x 80мм; 1,1мм x 100мм; 1,1мм x 120мм; 1,1мм x 140мм; 1,1мм x 150мм; 1,1мм x 200мм;
18. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 1,2мм x 3мм; 1,2мм x 4мм; 1,2мм x 5мм; 1,2мм x 6мм; 1,2мм x 7мм; 1,2мм x 8 мм; 1,2мм x 9 мм; 1,2мм x 10мм; 1,2мм x 11мм; 1,2мм x 12мм; 1,2мм x 12,7 мм; 1,2мм x 13мм; 1,2мм x 14мм; 1,2мм x 15мм; 1,2мм x 16мм; 1,2мм x 17мм; 1,2мм x 18мм; 1,2мм x 19мм; 1,2мм x 20мм; 1,2мм x 25мм; 1,2мм x 30мм; 1,2мм x 32мм; 1,2мм x 38мм; 1,2мм x 40мм; 1,2мм x 50мм; 1,2мм x 60 мм; 1,2мм x 70мм; 1,2мм x 80мм; 1,2мм x 100мм; 1,2мм x 120мм; 1,2мм x 140мм; 1,2мм x 150мм; 1,2мм x 200мм;
19. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 1,4мм x 3мм; 1,4мм x 4мм; 1,4мм x 5мм; 1,4мм x 6мм; 1,4мм x 7мм; 1,4мм x 8 мм; 1,4мм x 9 мм; 1,4мм x 10мм; 1,4мм x 11мм; 1,4мм x 12мм; 1,4мм x 12,7 мм; 1,4мм x 13мм; 1,4мм x 14мм; 1,4мм x 15мм; 1,4мм x 16мм; 1,4мм x 17мм; 1,4мм x 18мм; 1,4мм x 19мм; 1,4мм x 20мм; 1,4мм x 25мм; 1,4мм x 30мм; 1,4мм x 32мм; 1,4мм x 38мм; 1,4мм x 40мм; 1,4мм x 50мм; 1,4мм x 60 мм; 1,4мм x 70мм; 1,4мм x 80мм; 1,4мм x 100мм; 1,4мм x 120мм; 1,4мм x 140мм; 1,4мм x 150мм; 1,4мм x 200мм;
20. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 1,47мм x 3мм; 1,47мм x 4мм; 1,47мм x 5мм; 1,47мм x 6мм; 1,47мм x 7мм; 1,47мм x 8 мм; 1,47мм x 9 мм; 1,47мм x 10мм; 1,47мм x 11мм; 1,47мм x 12мм; 1,47мм x 12,7 мм; 1,47мм x 13мм; 1,47мм x 14мм; 1,47мм x 15мм; 1,47мм x 16мм; 1,47мм x 17мм; 1,47мм x 18мм; 1,47мм x 19мм; 1,47мм x 20мм; 1,47мм x 25мм; 1,47мм x 30мм; 1,47мм x 32мм; 1,47мм x 38мм; 1,47мм x 40мм; 1,47мм x 50мм; 1,47мм x 60 мм; 1,47мм x 70мм; 1,47мм x 80мм; 1,47мм x 100мм; 1,47мм x 120мм; 1,47мм x 140мм; 1,47мм x 150мм; 1,47мм x 200мм;
21. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 1,5мм x 3мм; 1,5мм x 4мм; 1,5мм x 5мм; 1,5мм x 6мм; 1,5мм x 7мм; 1,5мм x 8 мм; 1,5мм x 9 мм; 1,5мм x 10мм; 1,5мм x 11мм; 1,5мм x 12мм; 1,5мм x 12,7 мм; 1,5мм x 13мм; 1,5мм x 14мм; 1,5мм x 15мм; 1,5мм x 16мм; 1,5мм x 17мм; 1,5мм x 18мм; 1,5мм x 19мм; 1,5мм x 20мм; 1,5мм x 25мм; 1,5мм x 30мм; 1,5мм x 32мм; 1,5мм x 38мм; 1,5мм x 40мм; 1,5мм x 50мм; 1,5мм x 60 мм; 1,5мм x 70мм; 1,5мм x 80мм; 1,5мм x 100мм; 1,5мм x 120мм; 1,5мм x 140мм; 1,5мм x 150мм; 1,5мм x 200мм;
22. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 1,6мм x 3мм; 1,6мм x 4мм; 1,6мм x 5мм; 1,6мм x 6мм; 1,6мм x 7мм; 1,6мм x 8 мм; 1,6мм x 9 мм; 1,6мм x 10мм; 1,6мм x 11мм; 1,6мм x 12мм; 1,6мм x 12,7 мм; 1,6мм x 13мм; 1,6мм x 14мм; 1,6мм x 15мм; 1,6мм x 16мм; 1,6мм x 17мм; 1,6мм x 18мм; 1,6мм x 19мм; 1,6мм x 20мм; 1,6мм x 25мм; 1,6мм x 30мм; 1,6мм x 32мм; 1,6мм x 38мм; 1,6мм x 40мм; 1,6мм x 50мм; 1,6мм x 60 мм; 1,6мм x 70мм; 1,6мм x 80мм; 1,6мм x 100мм; 1,6мм x 120мм; 1,6мм x 140мм; 1,6мм x 150мм; 1,6мм x 200мм;
23. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 1,8мм x 3мм; 1,8мм x 4мм; 1,8мм x 5мм; 1,8мм x 6мм; 1,8мм x 7мм; 1,8мм x 8 мм; 1,8мм x 9 мм; 1,8мм x 10мм; 1,8мм x 11мм; 1,8мм x 12мм; 1,8мм x 12,7 мм; 1,8мм x 13мм; 1,8мм x 14мм; 1,8мм x 15мм; 1,8мм x 16мм; 1,8мм x 17мм; 1,8мм x 18мм; 1,8мм x 19мм; 1,8мм x 20мм; 1,8мм x 25мм; 1,8мм x 30мм; 1,8мм x 32мм; 1,8мм x 38мм; 1,8мм x 40мм; 1,8мм x 50мм; 1,8мм x 60 мм; 1,8мм x 70мм; 1,8мм x 80мм; 1,8мм x 100мм; 1,8мм x 120мм; 1,8мм x 140мм; 1,8мм x 150мм; 1,8мм x 200мм;

24. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 2,0мм х 3мм; 2,0мм х 4мм; 2,0мм х 5мм; 2,0мм х 6мм; 2,0мм х 7мм; 2,0мм х 8 мм; 2,0мм х 9 мм; 2,0мм х 10мм; 2,0мм х 11мм; 2,0мм х 12мм; 2,0мм х 12,7 мм; 2,0мм х 13мм; 2,0мм х 14мм; 2,0мм х 15мм; 2,0мм х 16мм; 2,0мм х 17мм; 2,0мм х 18мм; 2,0мм х 19мм; 2,0мм х 20мм; 2,0мм х 25мм; 2,0мм х 30мм; 2,0мм х 32мм; 2,0мм х 38мм; 2,0мм х 40мм; 2,0мм х 50мм; 2,0мм х 60 мм; 2,0мм х 70мм; 2,0мм х 80мм; 2,0мм х 100мм; 2,0мм х 120мм; 2,0мм х 140мм; 2,0мм х 150мм; 2,0мм х 200мм;
25. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 2,1мм х 3мм; 2,1мм х 4мм; 2,1мм х 5мм; 2,1мм х 6мм; 2,1мм х 7мм; 2,1мм х 8 мм; 2,1мм х 9 мм; 2,1мм х 10мм; 2,1мм х 11мм; 2,1мм х 12мм; 2,1мм х 12,7 мм; 2,1мм х 13мм; 2,1мм х 14мм; 2,1мм х 15мм; 2,1мм х 16мм; 2,1мм х 17мм; 2,1мм х 18мм; 2,1мм х 19мм; 2,1мм х 20мм; 2,1мм х 25мм; 2,1мм х 30мм; 2,1мм х 32мм; 2,1мм х 38мм; 2,1мм х 40мм; 2,1мм х 50мм; 2,1мм х 60 мм; 2,1мм х 70мм; 2,1мм х 80мм; 2,1мм х 100мм; 2,1мм х 120мм; 2,1мм х 140мм; 2,1мм х 150мм; 2,1мм х 200мм;
26. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 2,2мм х 3мм; 2,2мм х 4мм; 2,2мм х 5мм; 2,2мм х 6мм; 2,2мм х 7мм; 2,2мм х 8 мм; 2,2мм х 9 мм; 2,2мм х 10мм; 2,2мм х 11мм; 2,2мм х 12мм; 2,2мм х 12,7 мм; 2,2мм х 13мм; 2,2мм х 14мм; 2,2мм х 15мм; 2,2мм х 16мм; 2,2мм х 17мм; 2,2мм х 18мм; 2,2мм х 19мм; 2,2мм х 20мм; 2,2мм х 25мм; 2,2мм х 30мм; 2,2мм х 32мм; 2,2мм х 38мм; 2,2мм х 40мм; 2,2мм х 50мм; 2,2мм х 60 мм; 2,2мм х 70мм; 2,2мм х 80мм; 2,2мм х 100мм; 2,2мм х 120мм; 2,2мм х 140мм; 2,2мм х 150мм; 2,2мм х 200мм;
27. Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM: 2,5мм х 3мм; 2,5мм х 4мм; 2,5мм х 5мм; 2,5мм х 6мм; 2,5мм х 7мм; 2,5мм х 8 мм; 2,5мм х 9 мм; 2,5мм х 10мм; 2,5мм х 11мм; 2,5мм х 12мм; 2,5мм х 12,7 мм; 2,5мм х 13мм; 2,5мм х 14мм; 2,5мм х 15мм; 2,5мм х 16мм; 2,5мм х 17мм; 2,5мм х 18мм; 2,5мм х 19мм; 2,5мм х 20мм; 2,5мм х 25мм; 2,5мм х 30мм; 2,5мм х 32мм; 2,5мм х 38мм; 2,5мм х 40мм; 2,5мм х 50мм; 2,5мм х 60 мм; 2,5мм х 70мм; 2,5мм х 80мм; 2,5мм х 100мм; 2,5мм х 120мм; 2,5мм х 140мм; 2,5мм х 150мм; 2,5мм х 200мм;

Фирма-производитель/ Разработчик

«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH), Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия)

Тел. +49-30-639-78-825

факс: +49-30-639-08-519

Адрес места производства

1. «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH), Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия)

2. ЗАО НПО «ГАРАНТ», 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 30, стр.1, Россия

Уполномоченный представитель производителя

Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение «ГАРАНТ» (ЗАО НПО «ГАРАНТ»), 129337, Москва, ул. Красная Сосна, д.30, стр.1, +7(495) 789-38-01, +7 (495) 789-38-02, +7(495) 745-05-56

Классификация медицинского изделия

Согласно Директиве Совета ЕС 93/42/ЕЕС от 14.06.1993 года медицинское изделие отнесено к классу 2 А.

Назначение медицинского изделия

Предназначено для использования в общей медицинской практике для внутривенного, внутримышечного, подкожного введения лекарственных средств, пункций, забора биологического материала для анализов. Модели оснащены защитным механизмом (защитным колпачком) для предотвращения травмирования острием.

Показания к применению

Для инъекций.

Противопоказания к применению

Для предупреждения инфекций не использовать иглу, если ее индивидуальная упаковка повреждена. Использовать иглу исключительно один раз

Не изменять угол наклона, когда игла проколола кожу. Это может привести к изгибу или поломке иглы.

Побочные действия

Нет.

Вид контакта

Кратковременный контакт с организмом человека.

Устойчивость к воздействию биологических жидкостей

Изделие устойчиво к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации.

Описание, технические характеристики, основные принципы, на которых основана работа медицинского изделия

Игла как элемент инъекционного устройства состоит из трубки, выполненной из определенных сортов стали (высококачественной стали медицинского назначения, прочной и гипоаллергенной; полиэтиленовой или полипропиленовой головки(канюли) типа «Луер». Трубка иглы имеет острие и срез. Предохраняет иглу от внешних повреждений и обеспечивает безопасность при обращении с ней защитный колпачок. Основными значимыми параметрами иглы являются длина, внешний диаметр, угол заточки.

Инъекционные иглы состоят из металлической трубочки, один конец которой косо срезан, а на другом имеется канюля или муфта, служащая для насадки на конус шприца. Длина колеблется от 3 мм до 200 мм, а сечение - от 0,2 мм до 2,5 мм. Отличаются иглы и формой заточки. Так, иглы для внутривенных вливаний должны иметь срез под углом 45 градусов.

Иглы изготавливаются из высококачественной стали медицинского назначения, прочной и гипоаллергенной.

Особенности изделий:

- ✓ Игла, оптимальная геометрия острия иглы позволяют достигать максимального комфорта и надежности.
- ✓ Тройная лазерная заточка острия иглы.
- ✓ Игла покрывается силиконовой смазкой. Благодаря такой технологии игла входит в ткань не разрезая, а раздвигая волокна. Силиконовое покрытие делает ее продвижение плавным и безболезненным.
- ✓ Использование тонкостенной технологии увеличивает внутренний просвет иглы, обеспечивая более быстрое и безболезненную инъекцию. Изделие предназначено для стерильного и одноразового использования. Иглы непирогенны, нетоксичны.

Дополнительно возможны варианты игл с защитным пластиковым колпачком для безопасности работы иглы.

Технические характеристики:

- угол заточки – 11 ± 2 град.;
- радиус притупления острия – не более 0,03 мм;
- прочность соединения иглы и корпуса – более 22 Н.

Твердость рабочих частей и отдельных деталей инструментов в зависимости от материала, назначения и конструктивного исполнения следует выбирать из значений

Твердость по Роквеллу, HRC, - 30...48

Параметры шероховатости поверхностей игл не должны превышать значений:

0,32 мкм - наружных;

0,63 мкм - поверхностей заточки острия иглы;

20 мкм - остальных.

Масса изделия, см. приложение 1

Диаметр (наружный, внутренний), см. приложение 1

Рабочая дина иглы, см. приложение 1

Общая длина изделия, см. приложение 1

Толщина стенки (нормальная, тонкостенная, экстратонкостенная)

Диаметр иглы от 0,2 мм до 0,3 мм - толщина стенки экстратонкостенная (ETW)

Диаметр иглы от 0,33 мм до 0,55 мм - толщина стенки нормальная (RW)

Диаметр иглы от 0,6 мм до 2,5 мм - толщина стенки тонкостенная (TW)

Размеры, упаковка

Размеры, шт	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Масса упаковки, г
Потребительская упаковка (300 шт.)	20 +/- 3	12 +/-2	13 +/-2	320 +/- 40
Потребительская упаковка (250 шт.)	18 +/- 3	12 +/-2	13 +/-2	280 +/- 40
Потребительская упаковка (200 шт.)	16 +/- 3	8 +/-2	10 +/-2	240 +/- 40
Потребительская упаковка (150 шт.)	13 +/- 3	7 +/-2	7 +/-2	180 +/- 30
Потребительская упаковка (100 шт.)	12 +/- 3	10 +/-2	10 +/-2	120 +/- 20
Потребительская упаковка (50 шт.)	11 +/-3	5 +/-2	6 +/-2	60 +/- 20
Потребительская упаковка (25 шт.)	9 +/-3	5 +/-2	5 +/-2	30 +/- 10
Потребительская упаковка (10 шт.)	8 +/-3	4 +/-2	5 +/-2	20 +/- 7
Потребительская упаковка (5 шт.)	8 +/-3	4 +/-2	5 +/-2	10 +/- 3

Упаковка

Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Потребительская упаковка - по 5 шт, по 10 шт, по 25 шт, по 50 шт, по 100 шт, по 150 шт, по 200 шт., по 250 шт, по 300 шт.

Транспортная коробка (количество потребительских упаковок) – 2 уп, 4 уп, 5 уп, 6 уп, 10 уп, 12 уп, 15 уп, 20 уп, 25 уп, 30 уп, 35 уп, 40 уп, 50 уп, 60 уп, 70 уп, 80 уп, 90 уп, 100 уп.,150 уп, 200 уп, 250 уп, 300 уп., 500 уп.

Материал

Компонент	Материал	Марка/ CAS No.:	Производитель
Игла	Нержавеющая сталь	SUS 304	Zhejiang Oujian Medical devices Co., Ltd.
Покрытие иглы	Силиконовое масло*	63148-62-9	Weihai Huakang Biological Material Technology Co., Ltd
Колпачок иглы	Полипропилен	9010-79-1	LG Chem., Ltd. Densan Plant
Упаковка стерильная (блистер)			
Верхняя часть: Полиэтилен	Полиэтилен*	PE6148C	Peak Medical Packaging Co. Ltd.
Нижняя часть: Диализная бумага	Медицинская диализированная бумага 60 г / м ² с медицинским покрытием	SHANYIN	Shanghai Dingjia Packaging Materials Co., Ltd.
Упаковка вторичная (групповая)/транспортная			
Картонная коробка белая	Картон	SHANYIN белый	Shanghai Dingjia Packaging Materials Co., Ltd.
Гофрокартон	Картон	SHANYIN	Shanghai Dingjia Packaging Materials Co., Ltd.

*Паспорт безопасности см. Приложение 4

Комплектность поставки:

1. Игла
2. Колпачок иглы
3. Стерильная упаковка для иглы
4. Упаковка вторичная/групповая
5. Упаковка транспортная

Правила эксплуатации изделия

1. Откройте стерильную упаковку.
2. Наденьте иглу на шприц.
3. Снимите наружный колпачок иглы, держите иглу вверх и выжмите пузырьки воздуха, затем нажмите кнопку впрыска, если жидкость не течет, повторите действия выше, пока не появится жидкость.

4. Установка дозы для укола
5. Укол
6. Удалите иглу
7. Наденьте наружный колпачок иглы, снимите иглу, утилизируйте шприц и иглу.

Упаковка

Упаковка подразделяется на единичную упаковку, внутреннюю упаковку и внешнюю упаковку; на упаковке есть маркировка. Количество во внешней упаковке изменяется в зависимости от требований клиента.

Стерильность

Стерильные.

Кратность

Однократного использования.


Срок годности

5 лет.

Макет маркировки первичной упаковки

1. наименование изделия;
2. торговая марка/логотип изготовителя;
3. размер;
4. номер партии/серии
5. срок годности;
6. дата изготовления
7. стерильно
8. предупреждение о необходимости проверки целостности каждой потребительской упаковки перед применением или соответствующий символ.

Пример макета

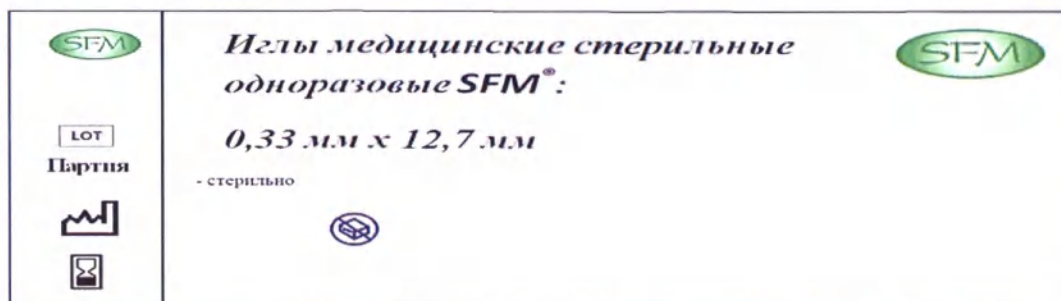

Макет маркировки транспортной упаковки


1. наименование изделия;
2. размер;
3. наименование, адрес и телефон изготовителя;
4. торговая марка/логотип изготовителя;
5. штрих-код;
6. условия хранения и воздействие климатических факторов;
7. номер партии;
8. срок годности;
9. номер Регистрационного Удостоверения;
10. наименование, адрес и телефон Уполномоченного Представителя;
11. дата изготовления;
12. количество шт.
13. стерильно, апиrogenно, нетоксично
14. однократного использования

Пример макета

 Количество шт. LOT Партия  	 Иглы медицинские стерильные одноразовые SFM®: 0,33 мм x 12,7 мм - нетоксично - непиrogenно - стерильно - однократного использования РУ № от «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH) Адрес: Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия) Тел.: +49-30-639-78-825 Уполномоченный представитель: ЗАО НПО «ГАРАНТ» Россия, 129337, г. Москва ул. Красная Сосна, д. 30, стр.1 Тел.: +7-495-789-38-01             (01)40889977710925(17)134568
---	---

Маркировка медицинского изделия включает в себя следующую информацию, представленную в таблице

Символы	Наименование символа
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Дата истечения срока годности
	Партия

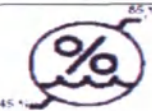	Защищать от воздействия влаги
	Верхний и нижний пределы температуры
	Верхний и нижний пределы влажности
	Знак CE-mark, соответствие продукции требованиям европейских регламентов
	Знак соответствия РСТ декларирования соответствия товаров
	Беречь от солнечных лучей.
	стерилизация Этиленоксидом
	не использовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке

Условия хранения, транспортировки, эксплуатации

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями стандартов и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от 0°C до +40°C, влажности 45% - 85%, атмосферном давлении 84 кПа - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

Хранить в сухом проветриваемом помещении в упакованном виде при температуре от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха 45% - 85%, атмосферном давлении 84 кПа - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

Условия эксплуатации: температура от +15°C до +40°C, влажность 45%-80%, атмосферное давление 84 кПа - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.)

Меры предосторожности

Не использовать по истечении срока годности, указанного производителем.

Утилизация

Обращение с отходами должно осуществляться соответственно с национальным законодательством. После применения не выбрасывать в окружающую среду. Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также с соответствующими местными, государственными и федеральными законодательными актами и согласно СанПин 2.1.7.2790-10 класса Б.

Соответствие стандартам

93/42/EEC	Директива Совета ЕС 93/42/EEC в отношении медицинских приборов, изделий, устройств, оборудования
EN ISO13485	Изделия медицинские - Системы менеджмента качества - Системные требования для целей регулирования
EN ISO14971	Медицинские изделия - Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
EN ISO10993-1	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 1: Оценка и исследования
EN ISO10993-5	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 5: Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
EN ISO10993-7	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации
EN ISO10993-10	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 10: Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
EN ISO10993-11	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 11: Исследования общетоксического действия
EN ISO10993-12	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 12: Приготовление проб и контрольные образцы
EN ISO11135-1	Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
EN ISO15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1: Основные требования
EN ISO11737-1	Стерилизация медицинских изделий – Микробиологические методы – Часть 1: Оценка популяции микроорганизмов на продукции
EN ISO11737-2	Стерилизация медицинских изделий – Микробиологические методы – Часть 2: Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации
EN ISO 15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, маркировка
EN ISO11607-1	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации - Часть 1: Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
EN ISO11607-2	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации - Часть 2: Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки
EN ISO14155	Клиническое исследование медицинских изделий для людей Надлежащая клиническая практика
EN ISO14644-1	Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия стандарту ISO 14644-1

Гарантии

Гарантия распространяется на материальные или производственные неисправности, замеченные при нормальных условиях эксплуатации изделия, начиная с даты поставки и заканчивая датой истечения срока годности, указанной на упаковке.

Приложение 1

вариант исполнения, медицинского изделия	Общая длина изделия, мм	Длина иглы рабочая, мм	Наружный диаметр игл, мм		Внутренний диаметр игл, мм	Масса ,гр.
			минимум	максимум	минимум	
0,2мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
0,23мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,229	0,241	нет	0,69+/-0,2
0,25мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
0,26мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2
0,29мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
0,60мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3
0,70мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,698	0,73	0,44	1,07+/-0,3
0,80мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,8	0,83	0,547	1,07+/-0,3
0,90мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,86	0,92	0,635	1,07+/-0,3
1,0мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	0,95	1,04	0,73	1,07+/-0,3
1,1мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	1,03	1,1	0,75	1,07+/-0,3
1,2мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	1,2	1,3	0,91	1,07+/-0,3
1,4мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	1,4	1,51	1,156	1,07+/-0,3
1,47мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	1,4	1,55	1,16	1,1+/-0,3
1,5мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	1,42	1,58	1,28	1,1+/-0,3
1,6мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	1,6	1,69	1,283	1,1+/-0,3
1,8мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	1,75	1,9	1,46	1,1+/-0,3
2,0мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	1,9	2,15	1,6	2,4+/-0,6
2,1мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм х 3мм	21 +/-3	3,0 +/-1	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм х 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
0,23мм х 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,229	0,241	нет	0,69+/-0,2
0,25мм х 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
0,26мм х 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2

0,29мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
0,60мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3
0,70мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,698	0,73	0,44	1,07+/-0,3
0,80мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,8	0,83	0,547	1,07+/-0,3
0,90мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,86	0,92	0,635	1,07+/-0,3
1,0мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	0,95	1,04	0,73	1,07+/-0,3
1,1мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	1,03	1,1	0,75	1,07+/-0,3
1,2мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	1,2	1,3	0,91	1,07+/-0,3
1,4мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	1,4	1,51	1,156	1,07+/-0,3
1,47мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	1,4	1,55	1,16	1,1+/-0,3
1,5мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	1,42	1,58	1,28	1,1+/-0,3
1,6мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	1,6	1,69	1,283	1,1+/-0,3
1,8мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	1,75	1,9	1,46	1,1+/-0,3
2,0мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	1,9	2,15	1,6	2,4+/-0,6
2,1мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 4мм	22 +/-3	4,0 +/-1	2,4	2,6	1,96	3+/-0,6
0,2мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
0,23мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,229	0,241	нет	0,69+/-0,2
0,25мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
0,26мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2
0,29мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
0,60мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3
0,70мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,698	0,73	0,44	1,07+/-0,3
0,80мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,8	0,83	0,547	1,07+/-0,3
0,90мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,86	0,92	0,635	1,07+/-0,3
1,0мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	0,95	1,04	0,73	1,07+/-0,3
1,1мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	1,03	1,1	0,75	1,07+/-0,3
1,2мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	1,2	1,3	0,91	1,07+/-0,3
1,4мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	1,4	1,51	1,156	1,07+/-0,3
1,47мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	1,4	1,55	1,16	1,1+/-0,3

1,5мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	1,42	1,58	1,28	1,1+/-0,3
1,6мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	1,6	1,69	1,283	1,1+/-0,3
1,8мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	1,75	1,9	1,46	1,1+/-0,3
2,0мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	1,9	2,15	1,6	2,4+/-0,6
2,1мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 5мм	23 +/-3	5 +/-1,5	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
0,23мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,229	0,241	нет	0,69+/-0,2
0,25мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
0,26мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2
0,29мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
0,60мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3
0,70мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,698	0,73	0,44	1,07+/-0,3
0,80мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,8	0,83	0,547	1,07+/-0,3
0,90мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,86	0,92	0,635	1,07+/-0,3
1,0мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	0,95	1,04	0,73	1,07+/-0,3
1,1мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	1,03	1,1	0,75	1,07+/-0,3
1,2мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	1,2	1,3	0,91	1,07+/-0,3
1,4мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	1,4	1,51	1,156	1,07+/-0,3
1,47мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	1,4	1,55	1,16	1,1+/-0,3
1,5мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	1,42	1,58	1,28	1,1+/-0,3
1,6мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	1,6	1,69	1,283	1,1+/-0,3
1,8мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	1,75	1,9	1,46	1,1+/-0,3
2,0мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	1,9	2,15	1,6	2,4+/-0,6
2,1мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 6мм	24 +/-4	6 +/-1,5	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
0,23мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,229	0,241	нет	0,69+/-0,2
0,25мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
0,26мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2
0,29мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2

0,45мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
0,60мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3
0,70мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,698	0,73	0,44	1,07+/-0,3
0,80мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,8	0,83	0,547	1,07+/-0,3
0,90мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,86	0,92	0,635	1,07+/-0,3
1,0мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	0,95	1,04	0,73	1,07+/-0,3
1,1мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	1,03	1,1	0,75	1,07+/-0,3
1,2мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	1,2	1,3	0,91	1,07+/-0,3
1,4мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	1,4	1,51	1,156	1,07+/-0,3
1,47мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	1,4	1,55	1,16	1,1+/-0,3
1,5мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	1,42	1,58	1,28	1,1+/-0,3
1,6мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	1,6	1,69	1,283	1,1+/-0,3
1,8мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	1,75	1,9	1,46	1,1+/-0,3
2,0мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	1,9	2,15	1,6	2,4+/-0,6
2,1мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 7мм	25 +/-4	7 +/-1,5	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
0,23мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,229	0,241	нет	0,69+/-0,2
0,25мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
0,26мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2
0,29мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
0,60мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3
0,70мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,698	0,73	0,44	1,07+/-0,3
0,80мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,8	0,83	0,547	1,07+/-0,3
0,90мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,86	0,92	0,635	1,07+/-0,3
1,0мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	0,95	1,04	0,73	1,07+/-0,3
1,1мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	1,03	1,1	0,75	1,07+/-0,3
1,2мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	1,2	1,3	0,91	1,07+/-0,3
1,4мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	1,4	1,51	1,156	1,07+/-0,3
1,47мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	1,4	1,55	1,16	1,1+/-0,3
1,5мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	1,42	1,58	1,28	1,1+/-0,3
1,6мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	1,6	1,69	1,283	1,1+/-0,3
1,8мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	1,75	1,9	1,46	1,1+/-0,3
2,0мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	1,9	2,15	1,6	2,4+/-0,6

2,1мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 8мм	26 +/-4	8 +/-2	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
0,23мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,229	0,241	нет	0,69+/-0,2
0,25мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
0,26мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2
0,29мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
0,60мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3
0,70мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,698	0,73	0,44	1,07+/-0,3
0,80мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,8	0,83	0,547	1,07+/-0,3
0,90мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,86	0,92	0,635	1,07+/-0,3
1,0мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	0,95	1,04	0,73	1,07+/-0,3
1,1мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	1,03	1,1	0,75	1,07+/-0,3
1,2мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	1,2	1,3	0,91	1,07+/-0,3
1,4мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	1,4	1,51	1,156	1,07+/-0,3
1,47мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	1,4	1,55	1,16	1,1+/-0,3
1,5мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	1,42	1,58	1,28	1,1+/-0,3
1,6мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	1,6	1,69	1,283	1,1+/-0,3
1,8мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	1,75	1,9	1,46	1,1+/-0,3
2,0мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	1,9	2,15	1,6	2,4+/-0,6
2,1мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 9мм	27 +/-4	9 +/-2	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
0,23мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,229	0,241	нет	0,73+/-0,2
0,25мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
0,26мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2
0,29мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
0,60мм x 10мм	28 +/-4	10 +/-2	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3

5	0,70мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	0,698	0,73	0,44	1,08+/-0,3
6	0,80мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	0,8	0,83	0,547	1,08+/-0,3
	0,90мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	0,86	0,92	0,635	1,08+/-0,3
	1,0мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	0,95	1,04	0,73	1,08+/-0,3
2	1,1мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	1,03	1,1	0,75	1,08+/-0,3
2	1,2мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	1,2	1,3	0,91	1,08+/-0,3
2	1,4мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	1,4	1,51	1,156	1,08+/-0,3
2	1,47мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	1,4	1,55	1,16	1,15+/-0,3
2	1,5мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	1,42	1,58	1,28	1,15+/-0,3
2	1,6мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	1,6	1,69	1,283	1,15+/-0,3
2	1,8мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	1,75	1,9	1,46	1,15+/-0,3
2	2,0мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2	2,1мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
	2,2мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
3	2,5мм x 10мм	28 +/-4	10+/-2	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
3							
3	0,2мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
3	0,23мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,229	0,241	нет	0,73+/-0,2
3	0,25мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
3	0,26мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2
3	0,29мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
3	0,30мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
3	0,33мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
3	0,40мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
3	0,45мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
3	0,50мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
3	0,55мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
6	0,60мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3
6	0,70мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,698	0,73	0,44	1,08+/-0,3
6	0,80мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,8	0,83	0,547	1,08+/-0,3
7	0,90мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,86	0,92	0,635	1,08+/-0,3
	1,0мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	0,95	1,04	0,73	1,08+/-0,3
2	1,1мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	1,03	1,1	0,75	1,08+/-0,3
2	1,2мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	1,2	1,3	0,91	1,08+/-0,3
2	1,4мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	1,4	1,51	1,156	1,08+/-0,3
2	1,47мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	1,4	1,55	1,16	1,15+/-0,3
2	1,5мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	1,42	1,58	1,28	1,15+/-0,3
2	1,6мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	1,6	1,69	1,283	1,15+/-0,3
2	1,8мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	1,75	1,9	1,46	1,15+/-0,3
2	2,0мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2	2,1мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
3	2,2мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
3	2,5мм x 11мм	29 +/-5	11+/-2	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
3							

0,2мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
0,23мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,229	0,241	нет	0,73+/-0,2
0,25мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
0,26мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2
0,29мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
0,60мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3
0,70мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,698	0,73	0,44	1,08+/-0,3
0,80мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,8	0,83	0,547	1,08+/-0,3
0,90мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,86	0,92	0,635	1,08+/-0,3
1,0мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	0,95	1,04	0,73	1,08+/-0,3
1,1мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	1,03	1,1	0,75	1,08+/-0,3
1,2мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	1,2	1,3	0,91	1,08+/-0,3
1,4мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	1,4	1,51	1,156	1,08+/-0,3
1,47мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	1,4	1,55	1,16	1,15+/-0,3
1,5мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	1,42	1,58	1,28	1,15+/-0,3
1,6мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	1,6	1,69	1,283	1,15+/-0,3
1,8мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	1,75	1,9	1,46	1,15+/-0,3
2,0мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 12мм	30 +/-5	12 +/-3	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
0,23мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,229	0,241	нет	0,73+/-0,2
0,25мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
0,26мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2
0,29мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
0,60мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3
0,70мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,698	0,73	0,44	1,08+/-0,3
0,80мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,8	0,83	0,547	1,08+/-0,3
0,90мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,86	0,92	0,635	1,08+/-0,3
1,0мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	0,95	1,04	0,73	1,08+/-0,3

1,1мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	1,03	1,1	0,75	1,08+/-0,3
1,2мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	1,2	1,3	0,91	1,08+/-0,3
1,4мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	1,4	1,51	1,156	1,08+/-0,3
1,47мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	1,4	1,55	1,16	1,15+/-0,3
1,5мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	1,42	1,58	1,28	1,15+/-0,3
1,6мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	1,6	1,69	1,283	1,15+/-0,3
1,8мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	1,75	1,9	1,46	1,15+/-0,3
2,0мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 12,7мм	30 +/-5	12,7 +/-3	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,203	0,216	нет	0,5+/-0,2
0,23мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,229	0,241	нет	0,73+/-0,2
0,25мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,254	0,267	нет	0,86+/-0,2
0,26мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,26	0,275	нет	0,88+/-0,2
0,29мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,55	0,58	0,28	1,05+/-0,3
0,60мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,6	0,673	0,37	1,06+/-0,3
0,70мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,698	0,73	0,44	1,08+/-0,3
0,80мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,8	0,83	0,547	1,08+/-0,3
0,90мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,86	0,92	0,635	1,08+/-0,3
1,0мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	0,95	1,04	0,73	1,08+/-0,3
1,1мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	1,03	1,1	0,75	1,08+/-0,3
1,2мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	1,2	1,3	0,91	1,08+/-0,3
1,4мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	1,4	1,51	1,156	1,08+/-0,3
1,47мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	1,4	1,55	1,16	1,15+/-0,3
1,5мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	1,42	1,58	1,28	1,15+/-0,3
1,6мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	1,6	1,69	1,283	1,15+/-0,3
1,8мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	1,75	1,9	1,46	1,15+/-0,3
2,0мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 13мм	31 +/-5	13 +/-3	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,203	0,216	нет	0,52+/-0,2
0,23мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,229	0,241	нет	0,74+/-0,2
0,25мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,254	0,267	нет	0,87+/-0,2
0,26мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,26	0,275	нет	0,9+/-0,2

0,29мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,55	0,58	0,28	1,07+/-0,3
0,60мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,6	0,673	0,37	1,07+/-0,3
0,70мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,698	0,73	0,44	1,09+/-0,3
0,80мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,8	0,83	0,547	1,09+/-0,3
0,90мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,86	0,92	0,635	1,09+/-0,3
1,0мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	0,95	1,04	0,73	1,09+/-0,3
1,1мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	1,03	1,1	0,75	1,09+/-0,3
1,2мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	1,2	1,3	0,91	1,09+/-0,3
1,4мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	1,4	1,51	1,156	1,09+/-0,3
1,47мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	1,4	1,55	1,16	1,17+/-0,3
1,5мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	1,42	1,58	1,28	1,17+/-0,3
1,6мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	1,6	1,69	1,283	1,17+/-0,3
1,8мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	1,75	1,9	1,46	1,17+/-0,3
2,0мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 14мм	32 +/-5	14 +/-3	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,203	0,216	нет	0,52+/-0,2
0,23мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,229	0,241	нет	0,74+/-0,2
0,25мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,254	0,267	нет	0,87+/-0,2
0,26мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,26	0,275	нет	0,9+/-0,2
0,29мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,55	0,58	0,28	1,07+/-0,3
0,60мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,6	0,673	0,37	1,07+/-0,3
0,70мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,698	0,73	0,44	1,09+/-0,3
0,80мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,8	0,83	0,547	1,09+/-0,3
0,90мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,86	0,92	0,635	1,09+/-0,3
1,0мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	0,95	1,04	0,73	1,09+/-0,3
1,1мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	1,03	1,1	0,75	1,09+/-0,3
1,2мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	1,2	1,3	0,91	1,09+/-0,3
1,4мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	1,4	1,51	1,156	1,09+/-0,3
1,47мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	1,4	1,55	1,16	1,17+/-0,3

2	1,5мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	1,42	1,58	1,28	1,17+/-0,3
0,2	1,6мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	1,6	1,69	1,283	1,17+/-0,3
2	1,8мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	1,75	1,9	1,46	1,17+/-0,3
2	2,0мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2	2,1мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
8	2,2мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
3	2,5мм x 15мм	33 +/-5	15 +/-3	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
3							
3	0,2мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,203	0,216	нет	0,52+/-0,2
3	0,23мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,229	0,241	нет	0,74+/-0,2
3	0,25мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,254	0,267	нет	0,87+/-0,2
3	0,26мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,26	0,275	нет	0,9+/-0,2
3	0,29мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
3	0,30мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
3	0,33мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
3	0,40мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
3	0,45мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
3	0,50мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
3	0,55мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,55	0,58	0,28	1,07+/-0,3
6	0,60мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,6	0,673	0,37	1,07+/-0,3
6	0,70мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,698	0,73	0,44	1,09+/-0,3
6	0,80мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,8	0,83	0,547	1,09+/-0,3
	0,90мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,86	0,92	0,635	1,09+/-0,3
	1,0мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	0,95	1,04	0,73	1,09+/-0,3
2	1,1мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	1,03	1,1	0,75	1,09+/-0,3
2	1,2мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	1,2	1,3	0,91	1,09+/-0,3
2	1,4мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	1,4	1,51	1,156	1,09+/-0,3
2	1,47мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	1,4	1,55	1,16	1,17+/-0,3
2	1,5мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	1,42	1,58	1,28	1,17+/-0,3
2	1,6мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	1,6	1,69	1,283	1,17+/-0,3
2	1,8мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	1,75	1,9	1,46	1,17+/-0,3
2	2,0мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2	2,1мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
	2,2мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
3	2,5мм x 16мм	34 +/-5	16 +/-3	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
3							
3	0,2мм x 17мм	35 +/-5	17 +/-3	0,203	0,216	нет	0,52+/-0,2
3	0,23мм x 17мм	35 +/-5	17 +/-3	0,229	0,241	нет	0,74+/-0,2
3	0,25мм x 17мм	35 +/-5	17 +/-3	0,254	0,267	нет	0,87+/-0,2
3	0,26мм x 17мм	35 +/-5	17 +/-3	0,26	0,275	нет	0,9+/-0,2
3	0,29мм x 17мм	35 +/-5	17 +/-3	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
3	0,30мм x 17мм	35 +/-5	17 +/-3	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
3	0,33мм x 17мм	35 +/-5	17 +/-3	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
3	0,40мм x 17мм	35 +/-5	17 +/-3	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2

0,45mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	0,55	0,58	0,28	1,07+/-0,3
0,60mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	0,6	0,673	0,37	1,07+/-0,3
0,70mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	0,698	0,73	0,44	1,09+/-0,3
0,80mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	0,8	0,83	0,547	1,09+/-0,3
0,90mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	0,86	0,92	0,635	1,09+/-0,3
1,0mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	0,95	1,04	0,73	1,09+/-0,3
1,1mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	1,03	1,1	0,75	1,09+/-0,3
1,2mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	1,2	1,3	0,91	1,09+/-0,3
1,4mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	1,4	1,51	1,156	1,09+/-0,3
1,47mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	1,4	1,55	1,16	1,17+/-0,3
1,5mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	1,42	1,58	1,28	1,17+/-0,3
1,6mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	1,6	1,69	1,283	1,17+/-0,3
1,8mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	1,75	1,9	1,46	1,17+/-0,3
2,0mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5mm x 17mm	35 +/-5	17 +/-3	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,203	0,216	нет	0,52+/-0,2
0,23mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,229	0,241	нет	0,74+/-0,2
0,25mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,254	0,267	нет	0,87+/-0,2
0,26mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,26	0,275	нет	0,9+/-0,2
0,29mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,324	0,351	0,133	0,94+/-0,2
0,40mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,44	0,47	0,232	0,98+/-0,2
0,50mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,55	0,58	0,28	1,07+/-0,3
0,60mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,6	0,673	0,37	1,07+/-0,3
0,70mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,698	0,73	0,44	1,09+/-0,3
0,80mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,8	0,83	0,547	1,09+/-0,3
0,90mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,86	0,92	0,635	1,09+/-0,3
1,0mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	0,95	1,04	0,73	1,09+/-0,3
1,1mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	1,03	1,1	0,75	1,09+/-0,3
1,2mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	1,2	1,3	0,91	1,09+/-0,3
1,4mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	1,4	1,51	1,156	1,09+/-0,3
1,47mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	1,4	1,55	1,16	1,17+/-0,3
1,5mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	1,42	1,58	1,28	1,17+/-0,3
1,6mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	1,6	1,69	1,283	1,17+/-0,3
1,8mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	1,75	1,9	1,46	1,17+/-0,3
2,0mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6

2.1mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	1.95	2.15	1.6	2.5 +/-0.6
2.2mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	2.1	2.3	1.93	2.55 +/-0.6
2.5mm x 18mm	36 +/-5	18 +/-3	2.4	2.6	1.96	3 +/-0.7
0.2mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.203	0.216	нет	0.52 +/-0.2
0.23mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.229	0.241	нет	0.74 +/-0.2
0.25mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.254	0.267	нет	0.87 +/-0.2
0.26mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.26	0.275	нет	0.9 +/-0.2
0.29mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.284	0.31	нет	0.9 +/-0.2
0.30mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.298	0.32	нет	0.92 +/-0.2
0.33mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.324	0.351	0.133	0.94 +/-0.2
0.40mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.4	0.42	0.184	0.96 +/-0.2
0.45mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.44	0.47	0.232	0.98 +/-0.2
0.50mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.5	0.53	0.232	1 +/-0.3
0.55mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.55	0.58	0.28	1.07 +/-0.3
0.60mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.6	0.673	0.37	1.07 +/-0.3
0.70mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.698	0.73	0.44	1.09 +/-0.3
0.80mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.8	0.83	0.547	1.09 +/-0.3
0.90mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.86	0.92	0.635	1.09 +/-0.3
1.0mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	0.95	1.04	0.73	1.09 +/-0.3
1.1mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	1.03	1.1	0.75	1.09 +/-0.3
1.2mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	1.2	1.3	0.91	1.09 +/-0.3
1.4mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	1.4	1.51	1.156	1.09 +/-0.3
1.47mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	1.4	1.55	1.16	1.17 +/-0.3
1.5mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	1.42	1.58	1.28	1.17 +/-0.3
1.6mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	1.6	1.69	1.283	1.17 +/-0.3
1.8mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	1.75	1.9	1.46	1.17 +/-0.3
2.0mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	1.9	2.15	1.6	2.48 +/-0.6
2.1mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	1.95	2.15	1.6	2.5 +/-0.6
2.2mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	2.1	2.3	1.93	2.55 +/-0.6
2.5mm x 19mm	37 +/-5	19 +/-3	2.4	2.6	1.96	3 +/-0.7
0.2mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.203	0.216	нет	0.52 +/-0.2
0.23mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.229	0.241	нет	0.74 +/-0.2
0.25mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.254	0.267	нет	0.87 +/-0.2
0.26mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.26	0.275	нет	0.9 +/-0.2
0.29mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.284	0.31	нет	0.9 +/-0.2
0.30mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.298	0.32	нет	0.92 +/-0.2
0.33mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.324	0.351	0.133	0.94 +/-0.2
0.40mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.4	0.42	0.184	0.96 +/-0.2
0.45mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.44	0.47	0.232	0.98 +/-0.2
0.50mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.5	0.53	0.232	1 +/-0.3
0.55mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.55	0.58	0.28	1.07 +/-0.3
0.60mm x 20mm	38 +/-5	20 +/-3	0.6	0.673	0.37	1.07 +/-0.3

0,70мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	0,698	0,73	0,44	1,09+/-0,3
0,80мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	0,8	0,83	0,547	1,09+/-0,3
0,90мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	0,86	0,92	0,635	1,09+/-0,3
1,0мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	0,95	1,04	0,73	1,09+/-0,3
1,1мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	1,03	1,1	0,75	1,09+/-0,3
1,2мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	1,2	1,3	0,91	1,09+/-0,3
1,4мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	1,4	1,51	1,156	1,09+/-0,3
1,47мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	1,4	1,55	1,16	1,17+/-0,3
1,5мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	1,42	1,58	1,28	1,17+/-0,3
1,6мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	1,6	1,69	1,283	1,17+/-0,3
1,8мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	1,75	1,9	1,46	1,17+/-0,3
2,0мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 20мм	38 +/-5	20 +/-3	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,203	0,216	нет	0,54+/-0,2
0,23мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,229	0,241	нет	0,75+/-0,2
0,25мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,254	0,267	нет	0,87+/-0,2
0,26мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,26	0,275	нет	0,9+/-0,2
0,29мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,298	0,32	нет	0,92+/-0,2
0,33мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,324	0,351	0,133	0,96+/-0,2
0,40мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,44	0,47	0,232	0,99+/-0,2
0,50мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,55	0,58	0,28	1,07+/-0,3
0,60мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,6	0,673	0,37	1,07+/-0,3
0,70мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,698	0,73	0,44	1,09+/-0,3
0,80мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,8	0,83	0,547	1,09+/-0,3
0,90мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,86	0,92	0,635	1,09+/-0,3
1,0мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	0,95	1,04	0,73	1,09+/-0,3
1,1мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	1,03	1,1	0,75	1,09+/-0,3
1,2мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	1,2	1,3	0,91	1,09+/-0,3
1,4мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	1,4	1,51	1,156	1,09+/-0,3
1,47мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	1,4	1,55	1,16	1,18+/-0,3
1,5мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	1,42	1,58	1,28	1,18+/-0,3
1,6мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	1,6	1,69	1,283	1,18+/-0,3
1,8мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	1,75	1,9	1,46	1,18+/-0,3
2,0мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 25мм	43 +/-6	25 +/-4	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7

0,2мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,203	0,216	нет	0,57+/-0,2
0,23мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,229	0,241	нет	0,75+/-0,2
0,25мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,254	0,267	нет	0,87+/-0,2
0,26мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,26	0,275	нет	0,9+/-0,2
0,29мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,298	0,32	нет	0,93+/-0,2
0,33мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,324	0,351	0,133	0,96+/-0,2
0,40мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,44	0,47	0,232	0,99+/-0,2
0,50мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,55	0,58	0,28	1,07+/-0,3
0,60мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,6	0,673	0,37	1,07+/-0,3
0,70мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,698	0,73	0,44	1,1+/-0,3
0,80мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,8	0,83	0,547	1,1+/-0,3
0,90мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,86	0,92	0,635	1,1+/-0,3
1,0мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	0,95	1,04	0,73	1,1+/-0,3
1,1мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	1,03	1,1	0,75	1,1+/-0,3
1,2мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	1,2	1,3	0,91	1,1+/-0,3
1,4мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	1,4	1,51	1,156	1,1+/-0,3
1,47мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	1,4	1,55	1,16	1,18+/-0,3
1,5мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	1,42	1,58	1,28	1,18+/-0,3
1,6мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	1,6	1,69	1,283	1,18+/-0,3
1,8мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	1,75	1,9	1,46	1,18+/-0,3
2,0мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 30мм	48 +/-6	30 +/-4	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,203	0,216	нет	0,57+/-0,2
0,23мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,229	0,241	нет	0,75+/-0,2
0,25мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,254	0,267	нет	0,87+/-0,2
0,26мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,26	0,275	нет	0,9+/-0,2
0,29мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,298	0,32	нет	0,93+/-0,2
0,33мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,324	0,351	0,133	0,96+/-0,2
0,40мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,44	0,47	0,232	0,99+/-0,2
0,50мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,55	0,58	0,28	1,07+/-0,3
0,60мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,6	0,673	0,37	1,07+/-0,3
0,70мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,698	0,73	0,44	1,1+/-0,3
0,80мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,8	0,83	0,547	1,1+/-0,3
0,90мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,86	0,92	0,635	1,1+/-0,3
1,0мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	0,95	1,04	0,73	1,1+/-0,3

1,1мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	1,03	1,1	0,75	1,1+/-0,3
1,2мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	1,2	1,3	0,91	1,1+/-0,3
1,4мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	1,4	1,51	1,156	1,1+/-0,3
1,47мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	1,4	1,55	1,16	1,8+/-0,4
1,5мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	1,42	1,58	1,28	1,18+/-0,4
1,6мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	1,6	1,69	1,283	1,18+/-0,4
1,8мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	1,75	1,9	1,46	1,18+/-0,4
2,0мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 32мм	50 +/-6	32 +/-4	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,203	0,216	нет	0,57+/-0,2
0,23мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,229	0,241	нет	0,75+/-0,2
0,25мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,254	0,267	нет	0,87+/-0,2
0,26мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,26	0,275	нет	0,9+/-0,2
0,29мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,298	0,32	нет	0,93+/-0,2
0,33мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,324	0,351	0,133	0,96+/-0,2
0,40мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,44	0,47	0,232	0,99+/-0,2
0,50мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,55	0,58	0,28	1,07+/-0,3
0,60мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,6	0,673	0,37	1,07+/-0,3
0,70мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,698	0,73	0,44	1,1+/-0,3
0,80мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,8	0,83	0,547	1,1+/-0,3
0,90мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,86	0,92	0,635	1,1+/-0,3
1,0мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	0,95	1,04	0,73	1,1+/-0,3
1,1мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	1,03	1,1	0,75	1,1+/-0,3
1,2мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	1,2	1,3	0,91	1,1+/-0,3
1,4мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	1,4	1,51	1,156	1,1+/-0,3
1,47мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	1,4	1,55	1,16	1,18+/-0,4
1,5мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	1,42	1,58	1,28	1,18+/-0,4
1,6мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	1,6	1,69	1,283	1,18+/-0,4
1,8мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	1,75	1,9	1,46	1,18+/-0,4
2,0мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 38мм	56 +/-6	38 +/-5	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 40мм	58 +/-6	40 +/-5	0,203	0,216	нет	0,57+/-0,2
0,23мм x 40мм	58 +/-6	40 +/-5	0,229	0,241	нет	0,75+/-0,2
0,25мм x 40мм	58 +/-6	40 +/-5	0,254	0,267	нет	0,87+/-0,2
0,26мм x 40мм	58 +/-6	40 +/-5	0,26	0,275	нет	0,9+/-0,2

3	0.29mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.284	0.31	нет	0.91 +/-0.2
3	0.30mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.298	0.32	нет	0.93 +/-0.2
3	0.33mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.324	0.351	0.133	0.96 +/-0.2
4	0.40mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.4	0.42	0.184	0.96 +/-0.2
4	0.45mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.44	0.47	0.232	0.99 +/-0.2
4	0.50mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.5	0.53	0.232	1 +/-0.3
4	0.55mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.55	0.58	0.28	1.07 +/-0.3
6	0.60mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.6	0.673	0.37	1.07 +/-0.3
6	0.70mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.698	0.73	0.44	1.1 +/-0.3
6	0.80mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.8	0.83	0.547	1.1 +/-0.3
	0.90mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.86	0.92	0.635	1.1 +/-0.3
	1.0mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	0.95	1.04	0.73	1.1 +/-0.3
2	1.1mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	1.03	1.1	0.75	1.1 +/-0.3
2	1.2mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	1.2	1.3	0.91	1.1 +/-0.3
2	1.4mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	1.4	1.51	1.156	1.1 +/-0.3
2	1.47mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	1.4	1.55	1.16	1.18 +/-0.4
2	1.5mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	1.42	1.58	1.28	1.18 +/-0.4
2	1.6mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	1.6	1.69	1.283	1.18 +/-0.4
2	1.8mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	1.75	1.9	1.46	1.18 +/-0.4
2	2.0mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	1.9	2.15	1.6	2.48 +/-0.6
2	2.1mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	1.95	2.15	1.6	2.5 +/-0.6
	2.2mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	2.1	2.3	1.93	2.55 +/-0.6
3	2.5mm x 40mm	58 +/-6	40 +/-5	2.4	2.6	1.96	3 +/-0.7
3							
3	0.2mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.203	0.216	нет	0.58 +/-0.2
3	0.23mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.229	0.241	нет	0.78 +/-0.2
3	0.25mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.254	0.267	нет	0.89 +/-0.2
3	0.26mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.26	0.275	нет	0.9 +/-0.2
3	0.29mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.284	0.31	нет	0.9 +/-0.2
3	0.30mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.298	0.32	нет	0.93 +/-0.2
3	0.33mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.324	0.351	0.133	0.96 +/-0.2
4	0.40mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.4	0.42	0.184	0.96 +/-0.2
4	0.45mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.44	0.47	0.232	0.99 +/-0.2
4	0.50mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.5	0.53	0.232	1 +/-0.3
4	0.55mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.55	0.58	0.28	1.07 +/-0.3
6	0.60mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.6	0.673	0.37	1.07 +/-0.3
6	0.70mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.698	0.73	0.44	1.15 +/-0.4
6	0.80mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.8	0.83	0.547	1.15 +/-0.4
	0.90mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.86	0.92	0.635	1.15 +/-0.4
	1.0mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	0.95	1.04	0.73	1.15 +/-0.4
2	1.1mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	1.03	1.1	0.75	1.15 +/-0.4
2	1.2mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	1.2	1.3	0.91	1.15 +/-0.4
2	1.4mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	1.4	1.51	1.156	1.15 +/-0.4
	1.47mm x 50mm	68 +/-6	50 +/-6	1.4	1.55	1.16	1.8 +/-0.5

1,5мм x 50мм	68 +/-6	50 +/-6	1,42	1,58	1,28	1,8+/-0,5
1,6мм x 50мм	68 +/-6	50 +/-6	1,6	1,69	1,283	1,8+/-0,5
1,8мм x 50мм	68 +/-6	50 +/-6	1,75	1,9	1,46	1,8+/-0,5
2,0мм x 50мм	68 +/-6	50 +/-6	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1мм x 50мм	68 +/-6	50 +/-6	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 50мм	68 +/-6	50 +/-6	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 50мм	68 +/-6	50 +/-6	2,4	2,6	1,96	3+/-0,6
0,2мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,203	0,216	нет	0,58+/-0,2
0,23мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,229	0,241	нет	0,78+/-0,2
0,25мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,254	0,267	нет	0,89+/-0,2
0,26мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,26	0,275	нет	0,9+/-0,2
0,29мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,284	0,31	нет	0,9+/-0,2
0,30мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,298	0,32	нет	0,93+/-0,2
0,33мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,324	0,351	0,133	0,96+/-0,2
0,40мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,4	0,42	0,184	0,96+/-0,2
0,45мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,44	0,47	0,232	0,99+/-0,2
0,50мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,5	0,53	0,232	1+/-0,3
0,55мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,55	0,58	0,28	1,07+/-0,3
0,60мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,6	0,673	0,37	1,07+/-0,3
0,70мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,698	0,73	0,44	1,15+/-0,4
0,80мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,8	0,83	0,547	1,15+/-0,4
0,90мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,86	0,92	0,635	1,15+/-0,4
1,0мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	0,95	1,04	0,73	1,15+/-0,4
1,1мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	1,03	1,1	0,75	1,15+/-0,4
1,2мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	1,2	1,3	0,91	1,15+/-0,4
1,4мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	1,4	1,51	1,156	1,15+/-0,4
1,47мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	1,4	1,55	1,16	1,8+/-0,5
1,5мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	1,42	1,58	1,28	1,8+/-0,5
1,6мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	1,6	1,69	1,283	1,8+/-0,5
1,8мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	1,75	1,9	1,46	1,8+/-0,5
2,0мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	1,9	2,15	1,6	2,48+/-0,6
2,1мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	1,95	2,15	1,6	2,5+/-0,6
2,2мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	2,1	2,3	1,93	2,55+/-0,6
2,5мм x 60мм	78 +/-6	60 +/-6	2,4	2,6	1,96	3+/-0,7
0,2мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,203	0,216	нет	0,78+/-0,2
0,23мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,229	0,241	нет	0,88+/-0,2
0,25мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,254	0,267	нет	0,99+/-0,2
0,26мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,26	0,275	нет	0,98+/-0,2
0,29мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,284	0,31	нет	0,98+/-0,2
0,30мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,298	0,32	нет	0,99+/-0,2
0,33мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,324	0,351	0,133	0,99+/-0,2
0,40мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,4	0,42	0,184	1,6+/-0,4

0,45мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,44	0,47	0,232	1,6+/-0,4
0,50мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,5	0,53	0,232	1,7+/-0,4
0,55мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,55	0,58	0,28	1,8+/-0,4
0,60мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,6	0,673	0,37	1,8+/-0,4
0,70мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,698	0,73	0,44	1,8+/-0,4
0,80мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,8	0,83	0,547	1,8+/-0,4
0,90мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,86	0,92	0,635	1,8+/-0,4
1,0мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	0,95	1,04	0,73	1,8+/-0,4
1,1мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	1,03	1,1	0,75	1,8+/-0,4
1,2мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	1,2	1,3	0,91	1,8+/-0,4
1,4мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	1,4	1,51	1,156	1,8+/-0,4
1,47мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	1,4	1,55	1,16	2,3+/-0,6
1,5мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	1,42	1,58	1,28	2,3+/-0,6
1,6мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	1,6	1,69	1,283	2,3+/-0,6
1,8мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	1,75	1,9	1,46	2,3+/-0,6
2,0мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	1,9	2,15	1,6	2,8+/-0,6
2,1мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	1,95	2,15	1,6	2,8+/-0,6
2,2мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	2,1	2,3	1,93	2,8+/-0,6
2,5мм x 70мм	88 +/-6	70 +/-6	2,4	2,6	1,96	3,5+/-0,7
0,2мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,203	0,216	нет	0,78+/-0,2
0,23мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,229	0,241	нет	0,88+/-0,2
0,25мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,254	0,267	нет	0,99+/-0,2
0,26мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,26	0,275	нет	0,98+/-0,2
0,29мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,284	0,31	нет	0,98+/-0,2
0,30мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,298	0,32	нет	0,99+/-0,2
0,33мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,324	0,351	0,133	0,99+/-0,2
0,40мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,4	0,42	0,184	1,6+/-0,4
0,45мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,44	0,47	0,232	1,6+/-0,4
0,50мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,5	0,53	0,232	1,7+/-0,4
0,55мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,55	0,58	0,28	1,8+/-0,4
0,60мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,6	0,673	0,37	1,8+/-0,4
0,70мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,698	0,73	0,44	1,8+/-0,4
0,80мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,8	0,83	0,547	1,8+/-0,4
0,90мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,86	0,92	0,635	1,8+/-0,4
1,0мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	0,95	1,04	0,73	1,8+/-0,4
1,1мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	1,03	1,1	0,75	1,8+/-0,4
1,2мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	1,2	1,3	0,91	1,8+/-0,4
1,4мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	1,4	1,51	1,156	1,8+/-0,4
1,47мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	1,4	1,55	1,16	2,3+/-0,5
1,5мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	1,42	1,58	1,28	2,3+/-0,5
1,6мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	1,6	1,69	1,283	2,3+/-0,5
1,8мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	1,75	1,9	1,46	2,3+/-0,5
2,0мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	1,9	2,15	1,6	2,8+/-0,5

2,1мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	1,95	2,15	1,6	2,8+/-0,5
2,2мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	2,1	2,3	1,93	2,8+/-0,5
2,5мм x 80мм	98 +/-7	80 +/-8	2,4	2,6	1,96	3,5+/-0,7
0,2мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,203	0,216	нет	0,78+/-0,2
0,23мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,229	0,241	нет	0,88+/-0,2
0,25мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,254	0,267	нет	0,99+/-0,2
0,26мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,26	0,275	нет	0,98+/-0,2
0,29мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,284	0,31	нет	0,98+/-0,2
0,30мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,298	0,32	нет	0,99+/-0,2
0,33мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,324	0,351	0,133	0,99+/-0,2
0,40мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,4	0,42	0,184	1,6+/-0,4
0,45мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,44	0,47	0,232	1,6+/-0,4
0,50мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,5	0,53	0,232	1,7+/-0,4
0,55мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,55	0,58	0,28	1,8+/-0,4
0,60мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,6	0,673	0,37	1,8+/-0,4
0,70мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,698	0,73	0,44	1,8+/-0,4
0,80мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,8	0,83	0,547	1,8+/-0,4
0,90мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,86	0,92	0,635	1,8+/-0,4
1,0мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	0,95	1,04	0,73	1,8+/-0,4
1,1мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	1,03	1,1	0,75	1,8+/-0,4
1,2мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	1,2	1,3	0,91	1,8+/-0,4
1,4мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	1,4	1,51	1,156	1,8+/-0,4
1,47мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	1,4	1,55	1,16	2,3+/-0,5
1,5мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	1,42	1,58	1,28	2,3+/-0,5
1,6мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	1,6	1,69	1,283	2,3+/-0,5
1,8мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	1,75	1,9	1,46	2,3+/-0,5
2,0мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	1,9	2,15	1,6	2,8+/-0,5
2,1мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	1,95	2,15	1,6	2,8+/-0,5
2,2мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	2,1	2,3	1,93	2,8+/-0,5
2,5мм x 100мм	118 +/-7	100 +/-10	2,4	2,6	1,96	3,5+/-0,7
0,2мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,203	0,216	нет	1+/-0,4
0,23мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,229	0,241	нет	1,2+/-0,4
0,25мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,254	0,267	нет	1,2+/-0,4
0,26мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,26	0,275	нет	1,2+/-0,4
0,29мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,284	0,31	нет	1,2+/-0,4
0,30мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,298	0,32	нет	1,3+/-0,4
0,33мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,324	0,351	0,133	1,3+/-0,4
0,40мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,4	0,42	0,184	1,8+/-0,4
0,45мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,44	0,47	0,232	1,8+/-0,4
0,50мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,5	0,53	0,232	1,9+/-0,4
0,55мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,55	0,58	0,28	2+/-0,4
0,60мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,6	0,673	0,37	2+/-0,4

0,5	0,70мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,698	0,73	0,44	2+/-0,4
0,5	0,80мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,8	0,83	0,547	2+/-0,4
0,7	0,90мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,86	0,92	0,635	2+/-0,4
	1,0мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	0,95	1,04	0,73	2+/-0,4
0,2	1,1мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	1,03	1,1	0,75	2+/-0,4
0,2	1,2мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	1,2	1,3	0,91	2+/-0,4
0,2	1,4мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	1,4	1,51	1,156	2+/-0,4
0,2	1,47мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	1,4	1,55	1,16	2,6+/-0,4
0,2	1,5мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	1,42	1,58	1,28	2,6+/-0,4
0,2	1,6мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	1,6	1,69	1,283	2,6+/-0,4
0,2	1,8мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	1,75	1,9	1,46	2,6+/-0,4
0,4	2,0мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	1,9	2,15	1,6	3,2+/-0,7
0,4	2,1мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	1,95	2,15	1,6	3,2+/-0,7
0,4	2,2мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	2,1	2,3	1,93	3,2+/-0,7
0,4	2,5мм x 120мм	138 +/-9	120 +/-12	2,4	2,6	1,96	3,8+/-0,7
0,4							
0,4	0,2мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,203	0,216	нет	1+/-0,4
0,4	0,23мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,229	0,241	нет	1,2+/-0,4
0,4	0,25мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,254	0,267	нет	1,2+/-0,4
0,4	0,26мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,26	0,275	нет	1,2+/-0,4
0,4	0,29мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,284	0,31	нет	1,2+/-0,4
0,4	0,30мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,298	0,32	нет	1,3+/-0,4
0,5	0,33мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,324	0,351	0,133	1,3+/-0,4
0,5	0,40мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,4	0,42	0,184	1,8+/-0,4
0,5	0,45мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,44	0,47	0,232	1,8+/-0,4
0,5	0,50мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,5	0,53	0,232	1,9+/-0,4
0,5	0,55мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,55	0,58	0,28	2+/-0,5
0,5	0,60мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,6	0,673	0,37	2+/-0,5
0,5	0,70мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,698	0,73	0,44	2+/-0,5
0,5	0,80мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,8	0,83	0,547	2+/-0,5
0,7	0,90мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,86	0,92	0,635	2+/-0,5
	1,0мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	0,95	1,04	0,73	2+/-0,5
	1,1мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	1,03	1,1	0,75	2+/-0,5
	1,2мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	1,2	1,3	0,91	2+/-0,5
	1,4мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	1,4	1,51	1,156	2+/-0,5
	1,47мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	1,4	1,55	1,16	2,6+/-0,5
	1,5мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	1,42	1,58	1,28	2,6+/-0,5
	1,6мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	1,6	1,69	1,283	2,6+/-0,5
	1,8мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	1,75	1,9	1,46	2,6+/-0,5
	2,0мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	1,9	2,15	1,6	3,2+/-0,7
	2,1мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	1,95	2,15	1,6	3,2+/-0,7
	2,2мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	2,1	2,3	1,93	3,2+/-0,7
	2,5мм x 140мм	158 +/-9	140 +/-15	2,4	2,6	1,96	3,8+/-0,7

0,2мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,203	0,216	нет	1+/-0,3
0,23мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,229	0,241	нет	1,2+/-0,4
0,25мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,254	0,267	нет	1,2+/-0,4
0,26мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,26	0,275	нет	1,2+/-0,4
0,29мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,284	0,31	нет	1,2+/-0,4
0,30мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,298	0,32	нет	1,3+/-0,4
0,33мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,324	0,351	0,133	1,3+/-0,4
0,40мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,4	0,42	0,184	1,8+/-0,4
0,45мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,44	0,47	0,232	1,8+/-0,4
0,50мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,5	0,53	0,232	1,9+/-0,4
0,55мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,55	0,58	0,28	2+/-0,5
0,60мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,6	0,673	0,37	2+/-0,5
0,70мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,698	0,73	0,44	2+/-0,5
0,80мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,8	0,83	0,547	2+/-0,5
0,90мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,86	0,92	0,635	2+/-0,5
1,0мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	0,95	1,04	0,73	2+/-0,5
1,1мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	1,03	1,1	0,75	2+/-0,5
1,2мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	1,2	1,3	0,91	2+/-0,5
1,4мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	1,4	1,51	1,156	2+/-0,5
1,47мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	1,4	1,55	1,16	2,6+/-0,6
1,5мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	1,42	1,58	1,28	2,6+/-0,6
1,6мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	1,6	1,69	1,283	2,6+/-0,6
1,8мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	1,75	1,9	1,46	2,6+/-0,6
2,0мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	1,9	2,15	1,6	3,2+/-0,7
2,1мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	1,95	2,15	1,6	3,2+/-0,7
2,2мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	2,1	2,3	1,93	3,2+/-0,7
2,5мм x 150мм	168 +/-9	150 +/-17	2,4	2,6	1,96	3,8+/-0,7
0,2мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,203	0,216	нет	2+/-0,6
0,23мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,229	0,241	нет	2+/-0,6
0,25мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,254	0,267	нет	2+/-0,6
0,26мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,26	0,275	нет	2+/-0,6
0,29мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,284	0,31	нет	2+/-0,6
0,30мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,298	0,32	нет	2+/-0,6
0,33мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,324	0,351	0,133	3+/-0,7
0,40мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,4	0,42	0,184	3+/-0,7
0,45мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,44	0,47	0,232	3+/-0,7
0,50мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,5	0,53	0,232	3+/-0,7
0,55мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,55	0,58	0,28	4+/-0,8
0,60мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,6	0,673	0,37	4+/-0,8
0,70мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,698	0,73	0,44	4+/-0,8
0,80мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,8	0,83	0,547	4+/-0,8
0,90мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,86	0,92	0,635	4+/-0,8
1,0мм x 200мм	218 +/-10	200 +/-20	0,95	1,04	0,73	4+/-0,8

1,1MM X 200MM	218 +/-10	200 +/-20	1,03	1,1	0,75	4+/-0,8
1,2MM X 200MM	218 +/-10	200 +/-20	1,2	1,3	0,91	4+/-0,8
1,4MM X 200MM	218 +/-10	200 +/-20	1,4	1,51	1,156	4+/-0,8
1,47MM X 200MM	218 +/-10	200 +/-20	1,4	1,55	1,16	5+/-0,8
1,5MM X 200MM	218 +/-10	200 +/-20	1,42	1,58	1,28	5+/-0,8
1,6MM X 200MM	218 +/-10	200 +/-20	1,6	1,69	1,283	5+/-0,8
1,8MM X 200MM	218 +/-10	200 +/-20	1,75	1,9	1,46	5+/-0,8
2,0MM X 200MM	218 +/-10	200 +/-20	1,9	2,15	1,6	6+/-1,5
2,1MM X 200MM	218 +/-10	200 +/-20	1,95	2,15	1,6	6+/-1,5
2,2MM X 200MM	218 +/-10	200 +/-20	2,1	2,3	1,93	6+/-1,5
2,5MM X 200MM	218 +/-10	200 +/-20	2,4	2,6	1,96	6+/-1,5

Berlin, 23.06.2020



Vera Lindner

Urkundenrolle-Nr. 201/2020

Vorstehende, vor mir vollzogene Unterschrift der


**Frau Vera Lindner, geb. am 25.05.1961,
wohnhaft: Friedenstr. 6, 15713 Königs Wusterhausen OT Niederlehme,**

ausgewiesen durch Vorlage eines gültigen Personaldokumentes mit Lichtbild, beglaubige ich
hiermit.

Der Notar fragte die Erschienenene, ob er oder eine der mit ihm beruflich verbundenen Personen
in der Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beglaubigung ist, außerhalb des Notaramtes
tätig war oder ist. Die Frage wurde verneint.

Der Notar wies die Erschienenene darauf hin, dass die Daten der Beteiligten in Übereinstimmung
mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen beim Notar gespeichert und bearbeitet werden.

Berlin, 23.06.2020

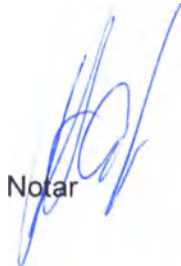

Notar





Берлин, 23.06.2020

(подписано)
Вера Линднер

Номер в реестре нотариальных действий 201/2020

Настоящим я свидетельствую подлинность проставленной в моем присутствии подписи

г-жи Веры Линднер

дата рождения: 25.05.1961 г.

адрес места жительства: Фриденштрассе, д. 6, 15713 Кёнигс Вустерхаузен, ОТ Нидерлейме

подтвердившей свою личность при помощи действующего удостоверения личности с фотографией.

Нотариусом лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, был задан вопрос о том, не выступало ли ранее данное лицо или другие лица, связанные с ним в рамках профессиональной деятельности, в качестве, отличном от нотариуса, в отношении предмета настоящего нотариального действия, на что указанное лицо ответило отрицательно.

Нотариусом лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, было заверено, что данные участвующих сторон будут сохранены и обработаны в соответствии с правилами защиты данных у нотариуса.

Берлин, 23.06.2020 г.
(подписано)
Нотариус

[Гербовая печать: Нотариус г. Берлин * Ральф Траутманн]

[Тисненая гербовая печать: Нотариус г. Берлин * Ральф Траутманн]

Перевод выполнил переводчик

Торопыгина Ольга Вячеславовна

Торопыгина Ольга Вячеславовна

Российская Федерация

Город Москва.

Восьмого июля две тысячи двадцатого года.

Я, Жлобо Игорь Геннадьевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Торопыгиной Ольги Вячеславовны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/372-н/77-2020-2-2151

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.

И.Г. Жлобо

Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 21 (двадцать один) лист(-а, -ов)
Нотариус И.Г. Жлобо