




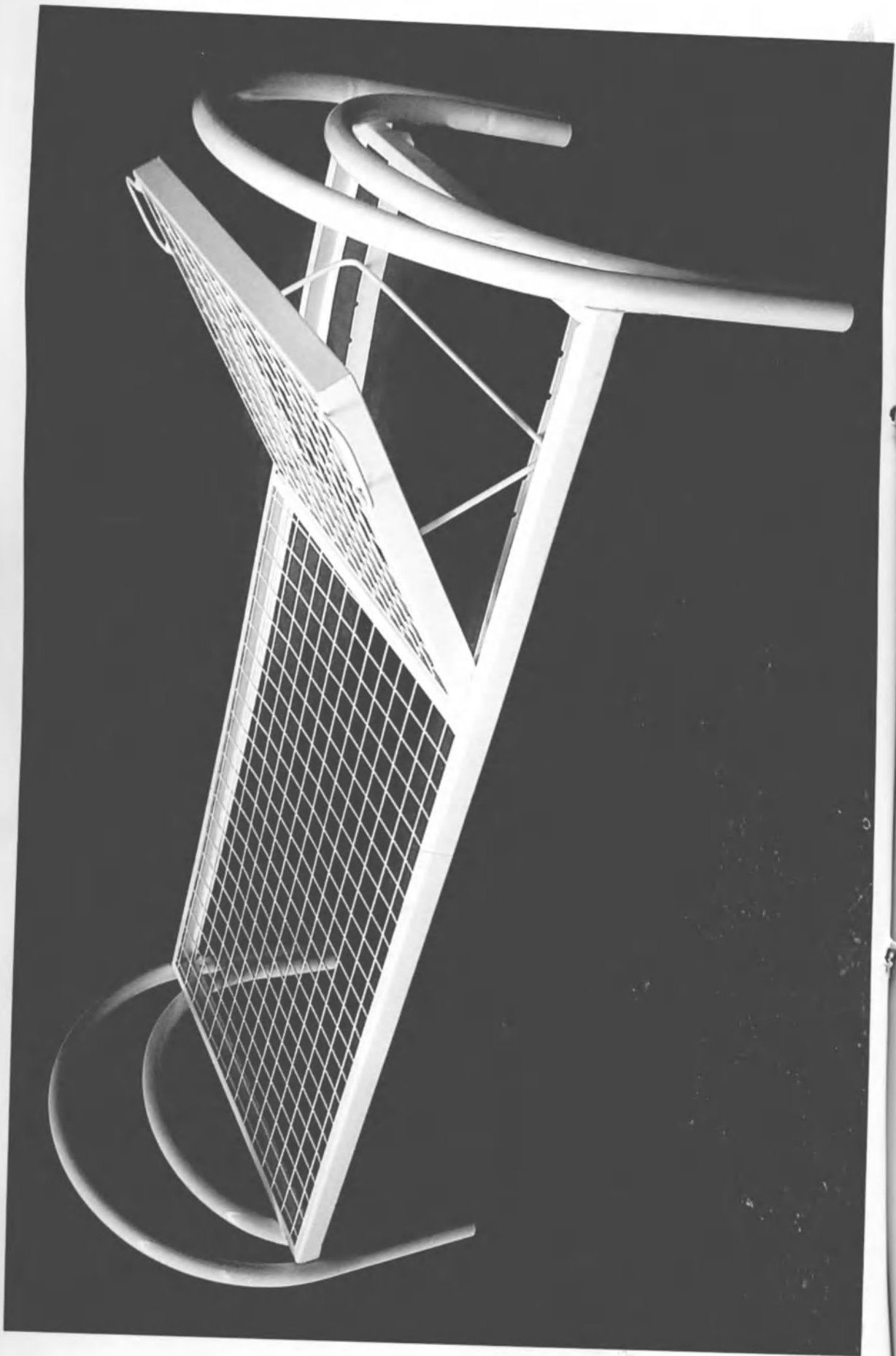

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность Ген. директор

Подпись А.А. Мухомов

« 16 » 07 20 20




Инструкция по сборке


Кровать медицинская функциональная в вариантах исполнения по
ТУ 32.50.30-001-07514618-2020:

- 1) Кровать медицинская функциональная, вариант исполнения МСК-124 по ТУ 32.50.30-001-07514618-2020.
- 2) Кровать медицинская функциональная, вариант исполнения МСК-132 по ТУ 32.50.30-001-07514618-2020

1. При помощи болтов М6х16 и гаек М6 с пружинными шайбами прикрепить ложе к спинкам (дужкам)
2. Перед началом эксплуатации проверить надежность крепления рамы ложа к спинкам.
3. Установите при наличии (МСК-132) необходимый угол наклона подголовника.
4. Провести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% хлорамина).

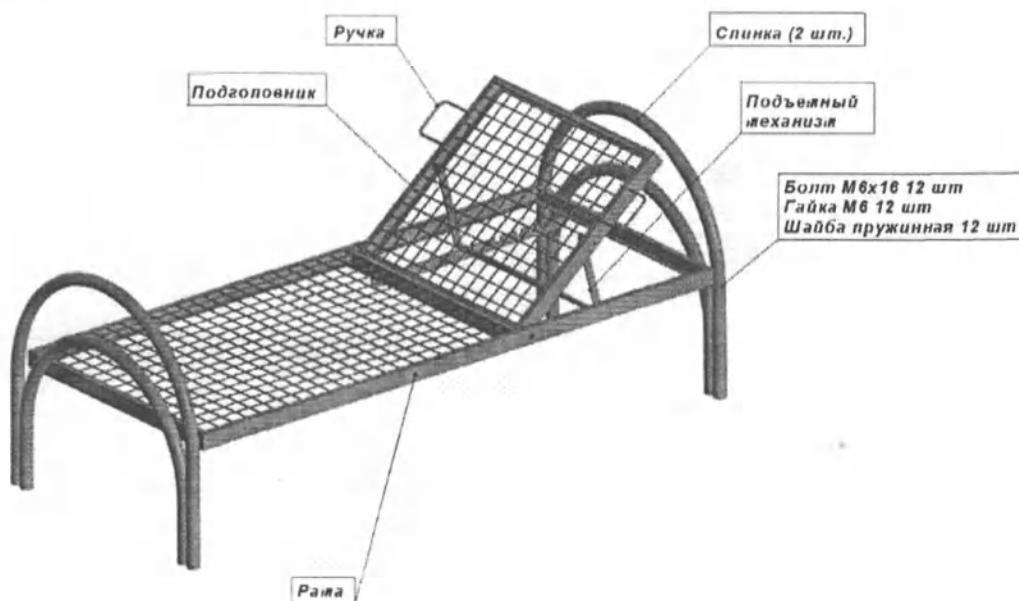

МСК-132

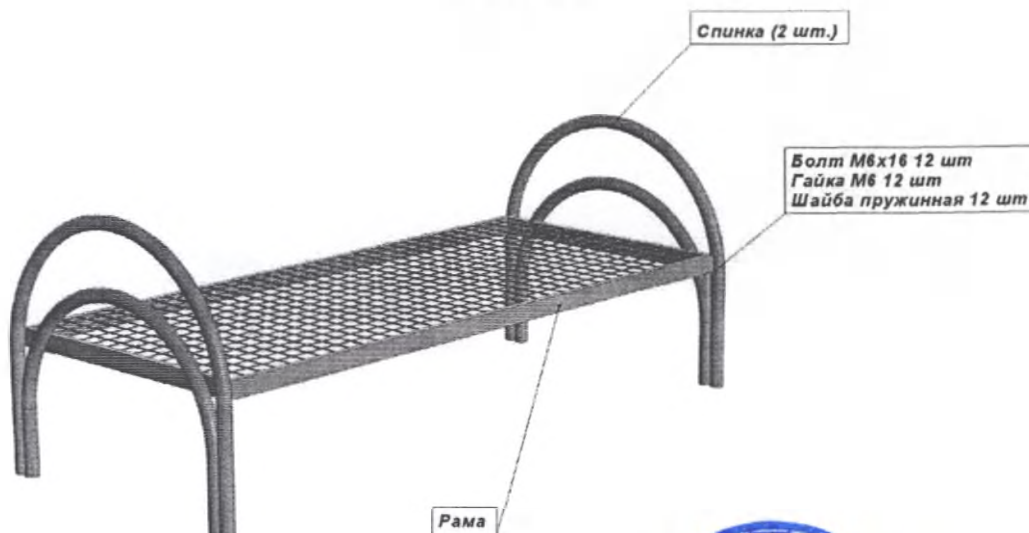

МСК-124

