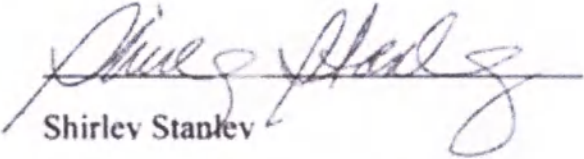


КОПИЯ

"Утверждаю"
"I certify"


Shirley Stanley

Director, International Sales

Ortho Organizers, Inc.

«02» September 2019

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дуги ортодонтические, варианты исполнения

ПРОИЗВОДСТВА

Орто Органайзерс, Инк. (Ortho Organizers, Inc.), США.

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California

County of San Diego

On September 03, 2019 before me, Raine Anderson Notary Public
(insert name and title of the officer)


personally appeared Shirley Stanley,

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.


I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

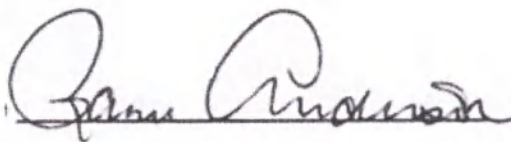

(Seal)

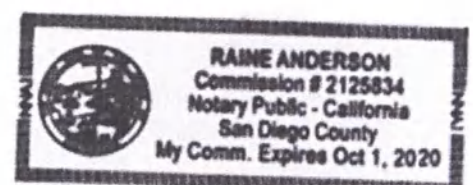

1. Наименование медицинского изделия.

Дуги ортодонтические, варианты исполнения:

1. Дуги ортодонтические стальные KEYHOLE ARCH-2 LOOP.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (22мм) арт. 125-121; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (24 мм) арт. 125-122; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (26мм) арт. 125-123; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (28мм) арт. 125-124; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (30 мм) арт. 125-125; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (32 мм) арт. 125-126; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (34мм) арт. 125-127; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (36 мм) арт. 125-128; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (38мм) арт. 125-129; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (40мм) арт. 125-130; .016x .022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (42мм) арт. 125-131; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (44мм) арт. 125-132; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (22мм) арт. 125-141; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (24 мм) арт. 125-142; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (26мм) арт. 125-143; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (28мм) арт. 125-144; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (30мм) арт. 125-145; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (32мм) арт. 125-146; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (34) арт. 125-147; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (36мм) арт. 125-148; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (38мм) арт. 125-149; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (40мм) арт. 125-150; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (42мм) арт. 125-151; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (44мм) арт. 125-152; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (22мм) арт. 125-181; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (24мм) арт. 125-182; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (26мм) арт. 125-183; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (28мм) арт. 125-184; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (30мм) арт. 125-185; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (32мм) арт. 125-186; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (34мм) арт. 125-187; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (36мм) арт. 125-188; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (38мм) арт. 125-189; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (40мм) арт. 125-190; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (42мм) арт. 125-191; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 2 LOOP (44мм) арт. 125-192.

2. Дуги ортодонтические стальные KEYHOLE ARCH-4 LOOP.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (22мм) арт. 126-121; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (24мм) арт. 126-122; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (26мм) арт. 126-123; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (28мм) арт. 126-124; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (30мм) арт. 126-125; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (32мм) арт. 126-126; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (34мм) арт. 126-127; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (36мм) арт. 126-128; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (38мм) арт. 126-129; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (40мм) арт. 126-130; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (42мм) арт. 126-131; .016x.022 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (44мм) арт. 126-132; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (22мм) арт. 126-141; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (24мм) арт. 126-142; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (26мм) арт. 126-143; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (28мм) арт. 126-144; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (30мм) арт. 126-145; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (32мм) арт. 126-146; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP

(34мм) арт. 126-147; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (36мм) арт. 126-148; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (38мм) арт. 126-149; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (40мм) арт. 126-150; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (42мм) арт. 126-151; .017x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (44мм) арт. 126-152; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (22мм) арт. 126-181; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (24мм) арт. 126-182; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (26мм) арт. 126-183; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (28мм) арт. 126-184; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (30мм) арт. 126-185; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (32мм) арт. 126-186; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (34мм) арт. 126-187; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (36мм) арт. 126-188; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (38мм) арт. 126-189; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (40мм) арт. 126-190; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (42мм) арт. 126-191; .019x.025 PRO FORM KEYHOLE ARCH – 4 LOOP (44мм) арт. 126-192.

3. Дуги ортодонтические стальные T-LOOP ARCH -2 LOOP.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (24мм) арт. 125-302; .016x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (26мм) арт. 125-303; .016x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (28мм) арт. 125-304; .016x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (30мм) арт. 125-305; .016 x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (32мм) арт. 125-306; .016 x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (34мм) арт. 125-307; .016 x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (36мм) арт. 125-308; .016x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (38мм) арт. 125-309; .016x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (40мм) арт. 125-310; .016x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (42мм) арт. 125-311; .016x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (44мм) арт. 125-312; .016x.022 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (46мм) арт. 125-313; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (24мм) арт. 125-322; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (26мм) арт. 125-323; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (28мм) арт. 125-324; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (30мм) арт. 125-325; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (32мм) арт. 125-326; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (34мм) арт. 125-327; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (36мм) арт. 125-328; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (38мм) арт. 125-329; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (40мм) арт. 125-330; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (42мм) арт. 125-331; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (44мм) арт. 125-332; .017x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (46мм) арт. 125-333; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (24мм) арт. 125-362; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (26мм) арт. 125-363; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (28мм) арт. 125-364; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (30мм) арт. 125-365; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (32мм) арт. 125-366; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (34мм) арт. 125-367; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (36мм) арт. 125-368; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (38мм) арт. 125-369; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (40мм) арт. 125-370; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (42мм) арт. 125-371; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (44мм) арт. 125-372; .019x.025 PRO FORM T-LOOP ARCH – 2 LOOP (46мм) арт. 125-373.

4. Дуги ортодонтические стальные BRT WIRE.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.016 UP PRO FORM BRT WIRE арт. 100-144; .016x.022 UP PRO FORM BRT WIRE арт. 100-145; .017x.025 UP PRO FORM BRT WIRE арт. 100-146; .018x.025 UP PRO FORM BRT WIRE арт. 100-147; .019x.025 UP PRO FORM BRT WIRE арт. 100-148; .021x.025 UP PRO FORM BRT WIRE арт. 100-149; .016x.016 LOW PRO FORM BRT WIRE арт. 100-154;

.016x.022 LOW PRO FORM BRT WIRE арт. 100-155; .017x.025 LOW PRO FORM BRT WIRE арт. 100-156; .018x.025 LOW PRO FORM BRT WIRE арт. 100-157; .019x.025 LOW PRO FORM BRT WIRE арт. 100-158; .021x.025 LOW PRO FORM BRT WIRE арт. 100-159.

5. Дуги ортодонтические стальные BRIGHT WIRE.

Количество дуг в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.016 UPPER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-553; .016x.016 LOWER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-554; .016x.022 UPPER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-555; .016x.022 LOWER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-556; .017x.025 UPPER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-557; .017x.025 LOWER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-558; .018x.025 UPPER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-559; .018x.025 LOWER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-560; .019x.025 UPPER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-561; .019x.025 LOWER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-562; .021x.025 UPPER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-563; .021x.025 LOWER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-564.

6. Дуги ортодонтические стальные SS OVAL ARCH FORM.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.016 UP SS OVAL ARCH FORM арт. 101-410; .016x.016 LO SS OVAL ARCH FORM арт. 101-411; .016x.022 UP SS OVAL ARCH FORM арт. 101-412; .016x.022 LO SS OVAL ARCH FORM арт. 101-413; .017x.025 UP SS OVAL ARCH FORM арт. 101-414; .017x.025 LO SS OVAL ARCH FORM арт. 101-415; .018x.018 UP SS OVAL ARCH FORM арт. 101-416; .018x.018 LO SS OVAL ARCH FORM арт. 101-417; .018x.025 UP SS OVAL ARCH FORM арт. 101-418; .018x.025 LO SS OVAL ARCH FORM арт. 101-419; .019x.025 UP SS OVAL ARCH FORM арт. 101-420; .019x.025 LO SS OVAL ARCH FORM арт. 101-421; .021x.025 UP SS OVAL ARCH FORM арт. 101-422; .021x.025 LO SS OVAL ARCH FORM арт. 101-423.

7. Дуги ортодонтические стальные PRO FORM COATED SS.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.022 UPPER PRO FORM COATED STAINLESS STEEL WIRE арт. 101-174; .016x.022 LOWER PRO FORM COATED STAINLESS STEEL WIRE арт. 101-175; .018x.024 UPPER PRO FORM COATED STAINLESS STEEL WIRE арт. 101-176; .018x.024 LOWER PRO FORM COATED STAINLESS STEEL ARCHWIRE арт. 101-177; .021x.027 UPPER PRO FORM COATED STAINLESS STEEL WIRE арт. 101-180; .021x.027 LOWER PRO FORM COATED STAINLESS STEEL WIRE арт. 101-181.

8. Дуги ортодонтические стальные UTILITY ARCH.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.016 LOWER STAINLESS STEEL UTILITY ARCHWIRE 28MM арт. 100-314; .016x.016 UPPER STAINLESS STEEL UTILITY ARCH 34 мм арт. 100-334; .016x.016 UPPER STAINLESS STEEL UTILITY ARCH 38 мм арт. 100-338; .016x.016 UPPER STAINLESS STEEL UTILITY ARCH 42 мм арт. 100-342.

9. Дуги ортодонтические стальные BRAIDED.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.016 UP PROFORM BRAIDED арт. 100-380; .016x.016 LOW PROFORM BRAIDED арт. 100-381; .016x.022 UP PROFORM BRAIDED арт. 100-382; .016x.022 LOW PROFORM BRAIDED арт. 100-383; .017x.025 UP PROFORM BRAIDED арт. 100-384; .017x.025 LOW PROFORM BRAIDED арт. 100-385; .018x.025 UP PROFORM BRAIDED арт. 100-386; .018x.025 LOW PROFORM BRAIDED арт. 100-387; .019x.025 UP PROFORM BRAIDED арт. 100-388; .019x.025 LOW PROFORM BRAIDED арт. 100-389; .021x.025 UP PROFORM BRAIDED арт. 100-390; .021x.025 LOW PROFORM BRAIDED арт. 100-391.

10. Дуги ортодонтические стальные D-LX Shape Stainless Steel Wire.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.025 D-LX Shape Stainless Steel Wire арт. 103-115; .017x.025 D-LX Shape Stainless Steel Wire арт. 103-116; .019x.025 D-LX Shape Stainless Steel Wire арт. 103-117.

11. Дуга ортодонтическая стальная M-Series Stainless Steel D-LX.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.019x.025 M-Series Stainless Steel D-LX Archwire w/EZ арт. 103-MFA; M-THREE BETA .019x.025 M-Series Stainless Steel D-LX Archwire w/EZ арт. 103-M3S.

12. Дуги ортодонтические стальные CO-AXIAL.

Количество в упаковке: по 20 шт.

Варианты исполнения:

.015 STANDARD CO-AXIAL арт. 100-251; .0175 STD CO-AXIAL арт. 100-252; .015 UPPER PRO FORM CO-AXIAL арт. 100-351; .015 LOWER PRO FORM CO-AXIAL арт. 100-352; .0175 UPPER PRO FORM CO-AXIAL арт. 100-353; .0175 LOWER PRO FORM CO-AXIAL арт. 100-354; .0195 UPPER PRO FORM CO-AXIAL арт. 100-355; .0195 LOWER PRO FORM CO-AXIAL арт. 100-356.

13. Дуги ортодонтические стальные 14" STR CO-AXIAL.

Количество в упаковке: по 20 шт.

Варианты исполнения:

14".015 STRAIGHT CO-AXIAL арт. 100-258; 14".0175 STRAIGHT CO-AXIAL арт. 100-259; 14".0195 STRAIGHT CO-AXIAL арт. 100-260.

14. Дуги ортодонтические стальные TWIST.

Количество в упаковке: по 20 шт.

Варианты исполнения:

.015 STANDARD TWIST арт. 100-201; .0175 STANDARD TWIST арт. 100-202; .0195 STANDARD TWIST арт. 100-203; .015 UPPER PRO FORM TWIST арт. 100-301; .015 LOWER PRO FORM TWIST арт. 100-302; .0175 UPPER PRO FORM TWIST арт. 100-303; .0175 LOWER PRO FORM TWIST арт. 100-304; .0195 UPPER PRO FORM TWIST арт. 100-305; .0195 LOWER PRO FORM TWIST арт. 100-306.

15. Дуги ортодонтические стальные BRT WIRE.

Количество в упаковке: по 50 шт.

Варианты исполнения:

.016 UPPER PRO FORM BRT WIRE арт. 100-141; .018 UPPER PRO FORM BRT WIRE арт. 100-142; .020 UPPER PRO FORM BRT WIRE арт. 100-143; .014 LOWER PRO FORM BRT WIRE арт. 100-150; .016 LOWER PRO FORM BRT WIRE арт. 100-151; .018 LOWER PRO FORM BRT WIRE арт. 100-152; .020 LOWER PRO FORM BRT WIRE арт. 100-153; .012 UPPER PRO FORM BRT WIRE арт. 100-160; .012 LOWER PRO FORM BRT WIRE арт. 100-161.

16. Дуги ортодонтические стальные BRIGHT WIRE.

Количество в упаковке: по 50 шт.

Варианты исполнения:

.014 UPPER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-544; .014 LOWER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-545; .016 UPPER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-546; .016 LOWER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-547; .018 UPPER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-548; .018 LOWER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-549; .020 UPPER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-550; .020 LOWER STANDARD BRIGHT WIRE арт. 100-551.

17. Дуги ортодонтические стальные SS OVAL ARCH FORM III.

Количество в упаковке: по 50 шт.

Варианты исполнения:

.014 UP SS OVAL ARCH FORM III арт. 101-402; .014 LO SS OVAL ARCH FORM III арт. 101-403; .016 UP SS OVAL ARCH FORM III арт. 101-404; .016 LO SS OVAL ARCH FORM III арт. 101-405; .018 UP SS OVAL ARCH FORM III арт. 101-406; .018 LO SS OVAL ARCH FORM III арт. 101-407; .020 UP SS OVAL ARCH FORM III арт. 101-408; .020 LO SS OVAL ARCH FORM III арт. 101-409.

18. Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM INTRUSION ARCHWIRE.

Количество в упаковке: по 5 шт.

Варианты исполнения:

.016x.022 UPPER/SHORT NITANIUM INTRUSION ARCHWIRE арт. 100-980; .016x.022 UPPER/LONG NITANIUM INTRUSION ARCHWIRE арт. 100-981; .016x.022 LOWER/SHORT NITANIUM INTRUSION ARCHWIRE арт. 100-982; .016x.022 LOWER/ LONG NITANIUM INTRUSION ARCHWIRE арт. 100-983; .017x.025 UPPER/ SHORT NITANIUM INTRUSION ARCHWIRE арт. 100-984; .017x.025 UPPER/ LONG NITANIUM INTRUSION ARCHWIRE арт. 100-985; .017x.025 LOWER/SHORT NITANIUM INTRUSION ARCHWIRE арт. 100-986; .017x.025 LOWER/LONG NITANIUM INTRUSION ARCHWIRE арт. 100-987.

19. Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM UTILITY ARCHWIRE.

Количество в упаковке: по 5 шт.

Варианты исполнения:

.018 LOWER NITANIUM UTILITY ARCHWIRE 28 мм арт. 100-273; .018 UPPER NITANIUM UTILITY ARCHWIRE 34 мм арт. 100-274; .018 UPPER NITANIUM UTILITY ARCHWIRE 38 мм арт. 100-275; .018 UPPER NITANIUM UTILITY ARCHWIRE 42 мм арт. 100-275L; .016x.016 LOWER NITANIUM UTILITY ARCHWIRE 28 мм арт. 100-276; .016x.016 UPPER NITANIUM UTILITY ARCHWIRE 34 мм арт. 100-277; .016x.016 UPPER NITANIUM UTILITY ARCHWIRE 38 мм арт. 100-278; .016x.016 LOWER NITANIUM UTILITY ARCHWIRE 24 мм арт. 100-279; .016x.016 UPPER NITANIUM UTILITY ARCH 42 мм арт. 100-280.

20. Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM BIO KINETIX UTILITY ARCHWIRE.

Количество в упаковке: по 5 шт.

Варианты исполнения:

.016 UPPER NITANIUM BIO KINETIX UTILITY ARCHWIRE 28 мм арт. 100-283; .016 UPPER NITANIUM BIO KINETIX UTILITY ARCH 34 мм арт. 100-284; .016 UPPER NITANIUM BIO KINETIX UTILITY ARCHWIRE 38 мм арт. 100-285.

21. Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM TORQUED ARCHWIRE.

Количество в упаковке: по 5 шт.

Варианты исполнения:

.017x.025 NITANIUM TORQUED ARCHWIRE 28 мм BLUE арт. 101-835; .017x.025 NITANIUM TORQUED ARCHWIRE 34 мм RED арт. 101-836; .017x.025 NITANIUM TORQUED ARCHWIRE 38 мм GREEN арт. 101-837; .019x.025 NITANIUM TORQUED ARCHWIRE 28 мм BLUE арт. 101-841; .019x.025 NITANIUM TORQUED ARCHWIRE 34 мм RED арт. 101-842; .019x.025 NITANIUM TORQUED ARCHWIRE 38 мм GREEN арт. 101-843.

22. Дуги ортодонтические никель-титановые RCS Super Elastic Nitium Wire.

Количество в упаковке: по 5 шт.

Варианты исполнения:

.017x.025 RCS Super Elastic Nitium Wire арт. 103-113; .019 x.025 RCS Super Elastic Nitium Wire арт. 103-114.

23. Дуги ортодонтические никель-титановые Pro Form Nitium w/20° Torque Wire.

Количество в упаковке: по 5 шт.

Варианты исполнения:

.016x.025 34 мм Pro Form Nitanium w/20° Torque Wire арт. 103-107; .016x.025 38 мм Pro Form Nitanium w/20° Torque Wire арт. 103-108; .017x.025 34 мм Pro Form Nitanium w/20° Torque Wire арт. 103-109; .017x.025 38 мм Pro Form Nitanium w/20° Torque Wire арт. 103-110; .019x.025 34 мм Pro Form Nitanium w/20° Torque Wire арт. 103-111; .019x.025 38 мм Pro Form Nitanium w/20° Torque Wire арт. 103-112.

24. Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.014 UPPER NITANIUM арт.100-650; .014 LOWER NITANIUM арт. 100-651; .016 UPPER NITANIUM арт. 100-652; .016 LOWER NITANIUM арт. 100-653; .018 UPPER NITANIUM арт. 100-654; .018 LOWER NITANIUM арт. 100-655; .020 UPPER NITANIUM арт. 100-656; .020 LOWER NITANIUM арт. 100-657; .012 UPPER NITANIUM арт. 100-658; .012 LOWER NITANIUM арт. 100-659; .016x.016 UPPER NITANIUM арт. 100-660; .016x.016 LOWER NITANIUM арт. 100-661; .016x.022 UPPER NITANIUM арт. 100-662; .016x.022 LOWER NITANIUM арт. 100-663; .017x.025 UPPER NITANIUM арт. 100-664; .017x.025 LOWER NITANIUM арт. 100-665; .018x.025 UPPER NITANIUM арт. 100-666; .018x.025 LOWER NITANIUM арт. 100-667; .019x.025 UPPER NITANIUM арт. 100-668; .019x.025 LOWER NITANIUM арт. 100-669; .018x.018 UPPER NITANIUM арт. 100-670; .018x.018 LOWER NITANIUM арт. 100-671; .020x.020 UPPER NITANIUM арт. 100-672; .020x.020 LOWER NITANIUM арт. 100-673; .016 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 UPPER арт. 100-582; .016 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 LOWER арт. 100-583; .018 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 UPPER арт. 100-584; .018 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 LOWER арт. 100-585; .016x.022 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 UPPER арт. 100-590; .016x.022 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 LOWER арт. 100-591; .017x.025 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 UPPER арт. 100-592; .017x.025 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 LOWER арт. 100-593; .018x.025 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 UPPER арт. 100-594; .018x.025 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 LOWER арт. 100-595; .019x.025 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 UPPER арт. 100-596; .019x.025 DIMPLE NITANIUM RCS - 2 LOWER арт. 100-597; .014 NITANIUM RCS ARCHWIRE-UPPER арт. 100-599; .014 NITANIUM RCS ARCHWIRE-LOWER арт. 100-600; .016 UPPER NITANIUM RCS ARCHWIRES арт. 100-601; .016 NITANIUM RCS ARCHWIRE - LOWER арт. 100-602; .018 UPPER NITANIUM RCS ARCHWIRES арт. 100-603; .018 NITANIUM RCS ARCHWIRE - LOWER арт. 100-604; .016x.022 NITANIUM RCS ARCHWIRE - UPPER арт. 100-605; .016x.022 NITANIUM RCS ARCHWIRE - LOWER арт. 100-606; .017x.025 NITANIUM RCS ARCHWIRE - UPPER арт. 100-607; .017x.025 NITANIUM RCS ARCHWIRE - LOWER арт. 100-608; .019x.025 NITANIUM RCS ARCHWIRE - UPPER арт. 100-609; .019x.025 NITANIUM RCS ARCHWIRE - LOWER арт. 100-610; .014 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG UPPER арт. 100-700; .014 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG LOWER арт. 100-701; .016 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG UPPER арт. 100-702; .016 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG LOWER арт. 100-703; .018 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG UPPER арт. 100-704; .018 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG LOWER арт.100-705; .020 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG UPPER арт. 100-706; .020 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG LOWER арт. 100-707; .016 x.016 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG UPPER арт. 100-708; .016x.016 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG LOWER арт. 100-709; .016x.022 UPPER NITANIUM RCS STRAIGHT LEGS арт. 100-710; .016x.022 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG LOWER арт. 100-711; .017x.025 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG UPPER арт. 100-712; .017x.025 LOWER NITANIUM RCS STRAIGHT LEGS арт. 100-713; .018x.025 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG UPPER арт. 100-714; .018x.025 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG LOWER арт. 100-715; .019x.025 UPPER NITANIUM RCS STRAIGHT LEGS арт. 100-716; .019x.025 NITANIUM RCS STRAIGHT LEG LOWER арт. 100-717; .014 UPPER DIMPLE PRO FORM NITANIUM арт. 100-800; .014 LOWER DIMPLE PRO FORM NITANIUM арт. 100-801; .016 UPPER DIMPLE PRO FORM NITANIUM арт. 100-802; .016 LOWER DIMPLE PRO FORM NITANIUM арт. 100-803; .018 UPPER DIMPLE PRO FORM NITANIUM арт. 100-804; .018

LOWER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-805; .020 UPPER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-806; .020 LOWER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-807; .016x.016 UPPER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-808; .016 x.016 LOWER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-809; .016x.022 UPPER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-810; .016x.022 LOWER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-811; .017x.025 UPPER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-812; .017x.025 LOWER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-813; .018x.025 UPPER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-814; .018x.025 LOWER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-815; .019x.025 UPPER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-816; .019x.025 LOWER DIMPLE PRO FORM NITANIUM apt. 100-817; .012 UPPER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-878; .012 LOWER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-879; .014 UPPER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-880; .014 LOWER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-881; .016 UPPER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-882; .016 LOWER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-883; .018 UPPER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-884; .018 LOWER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-885; .016x.022 UPPER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-886; .016x.022 LOWER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-887; .018x.018 UPPER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-887A; .018x.018 LOWER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-887B; .018x.024 LOWER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-887D; .018x.025 UPPER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-888; .018x.025 LOWER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-889; .019x.025 UPPER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-890; .019x.025 LOWER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-891; .021x.027 UPPER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-892; .021x.027 LOWER PRO FORM COATED NITANIUM apt. 100-893.

25. Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.012 UPPER BIO-KINETIX THERMAL apt. 100-850; .012 LOWER BIO-KINETIX THERMAL apt. 100-851; .014 UPPER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-852; .014 LOWER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-853; .016 UPPER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-854; .016 LOWER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-855; .018 UPPER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-856; .018 LOWER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-857; .016x.016 UPPER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-860; .016x.016 LOWER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-861; .016x.022 UPPER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-862; .016x.022 LOWER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-863; .017x.025 UPPER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-864; .017x.025 LOWER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-865; .018x.025 UPPER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-866; .018x.025 LOWER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-867; .019x.025 UPPER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-868; .019x.025 LOWER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-869; .021x.025 UPPER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-870; .021x.025 LOWER BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-871; .021x.027 UPPER PRO FORM BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-876; .021x.027 LOWER PRO FORM BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM apt. 100-877; .016 BIO-KINETIX NITANIUM RCS-U apt. 100-765; .016 BIO-KINETIX NITANIUM RCS- L apt. 100-766; .016x.022 BIO-KINETIX NITANIUM RCS-U apt. 100-769; .016x.022 BIO-KINETIX NITANIUM RCS-L apt. 100-770; .017x.025 BIO-KINETIX NITANIUM RCS-U apt. 100-771; .017x.025 BIO-KINETIX NITANIUM RCS-L apt. 100-772; .014 UPPER NITANIUM BIO- KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE apt. 100-852DM; .014 LOWER NITANIUM BIO- KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE apt. 100-853DM; .016 UPPER NITANIUM BIO-KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE apt. 100-854DM; .016 LOWER NITANIUM

BIO- KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE арт. 100-855DM; .018 UPPER NITANIUM BIO- KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE арт. 100-856DM; .018 UPPER NITANIUM BIO- KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE арт. 100-856DM; .018 LOWER NITANIUM BIO-KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE арт. 100-857DM; .018x.025 UPPER NITANIUM BIO-KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE арт. 100-866DM; .018x.025 LOWER NITANIUM BIO- KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE арт. 100-867DM; 14x25 UPPER NITANIUM BIO- KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE арт.100-872DM; 14x25 LOWER NITANIUM BIO- KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE арт.100-873DM; 16x25 UPPER NITANIUM BIO- KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE арт. 100-874DM; 16x25 LOWER NITANIUM BIO-KINETIX THERMAL PROFORM W/ DIMPLE арт. 100-875DM.

26. Дуги ортодонтические никель-титановые NT OVAL ARCH FORM III.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.012 UP NT OVAL ARCH FORM III арт. 101-430; .012 LO NT OVAL ARCH FORM III арт. 101-431; .014 UP NT OVAL ARCH FORM III арт. 101-432; .014 LO NT OVAL ARCH FORM III арт. 101-433; .016 UP NT OVAL ARCH FORM III арт. 101-434; .016 LO NT OVAL ARCH FORM III арт. 101-435; .018 UP NT OVAL ARCH FORM III арт. 101-436; .018 LO NT OVAL ARCH FORM III арт. 101-437; .020 UP NT OVAL ARCH FORM III арт. 101-438; .020 LO NT OVAL ARCH FORM III арт. 101-439

27. Дуги ортодонтические никель-титановые NT OVAL ARCH FORM.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.016 UP NT OVAL ARCH FORM арт. 101-440; .016x.016 LO NT OVAL ARCH FORM арт. 101-441; .016x.022 UP NT OVAL ARCH FORM арт. 101-442; .016x.022 LO NT OVAL ARCH FORM арт. 101-443; .017x.025 UP NT OVAL ARCH FORM арт. 101-444; .017x.025 LO NT OVAL ARCH FORM арт. 101-445; .018x.018 UP NT OVAL ARCH FORM арт. 101-446; .018x.018 LO NT OVAL ARCH FORM арт. 101-447; .018x.025 UP NT OVAL ARCH FORM арт. 101-448; .018x.025 LO NT OVAL ARCH FORM арт. 101-449; .019x.025 UP NT OVAL ARCH FORM арт. 101-450; .019x.025 LO NT OVAL ARCH FORM арт. 101-451; .021x.025 UP NT OVAL ARCH FORM арт. 101-452; .021x.025 LO NT OVAL ARCH FORM арт. 101-453.

28. Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.014 UPPER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-462; .014 LOWER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-463; .016 UPPER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-464; .016 LOWER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-465; .018 UPPER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-466; .018 LOWER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-467; .016x.016 UPPER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-470; .016x.016 LOWER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-471; .016x.022 UPPER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-472; .016x.022 LOWER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-473; .017x.025 UPPER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-474; .017x.025 LOWER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-475; .019x.025 UPPER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-480; .019x.025 LOWER BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH арт. 101-481.

29. Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX PLUS.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.013 D-LX Shape Bio-Kinetix Plus Wire арт. 103-100; .014 D-LX Shape Bio-Kinetix Plus Wire арт. 103-101; .016 D-LX Shape Bio-Kinetix Plus Wire арт. 103-102; .018 D-LX Shape Bio-

Kinetix Plus Wire apt. 103-103; .014X.025 D-LX Shape Bio-Kinetix Plus Wire apt. 103-104; .016x.025 D-LX Shape Bio-Kinetix Plus Wire apt. 103-105; .018x.025 D-LX Shape Bio-Kinetix Plus Wire apt. 103-106; .013 UPPER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-124; .013 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-125; .014 UPPER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-126; .014 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-127; .016 UPPER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-128; .016 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-129; .018 UPPER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-130; .018 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-131; .014x.025 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-133; .016x.016 UPPER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-134; .016x.016 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-135; .016x.022 UPPER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-136; .016x.022 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-137; .016x.025 UPPER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-138; .016x.025 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-139; .017x.025 UPPER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-140; .017x.025 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-141; .018x.025 UPPER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-142; .018x.025 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-143; .019x.025 UPPER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-144; .019x.025 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-145; .021x.025 UPPER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-146; .021x.025 LOWER BIO-KINETIX PLUS PRO FORM ARCH apt. 104-147; .014 UPPER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-152; .014 LOWER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-153; .016 UPPER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-154; .016 LOWER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-155; .018 UPPER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-156; .018 LOWER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-157; .014x.025 UPPER THERMAL NITANIUM BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCHWIRE apt. 104-158; .014x.025 LOWER THERMAL NITANIUM BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCHWIRE apt. 104-159; .016x.016 LOWER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-161; .016x.022 UPPER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-162; .016x.022 LOWER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-163; .016x.025 UPPER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-164; .016x.025 LOWER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-165; .017x.025 UPPER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-166; .017x.025 LOWER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-167; .018x.025 UPPER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-168; .018x.025 LOWER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-169; .019x.025 UPPER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-170; .019x.025 LOWER BIO-KINETIX PLUS OVAL ARCH apt. 104-171.

30. Дуги ортодонтические никель-титановые D-LX Bio-Kinetix.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.021x.027 D-LX SHAPE BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM WIRE apt. 103-123; .021x.027 CARRIERE D-LX BIO-KINETICS SINGLE PACK apt. 103-123C.

31. Дуги ортодонтические бета-титановые BETA CNA ARCHWIRE.

Количество в упаковке: по 5 шт.

Варианты исполнения:

.016 UPPER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE apt. 100-941; .018 UPPER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE apt. 100-942; .016x.022 UPPER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE apt. 100-944; .017x.025 UPPER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE apt. 100-945; .018x.018 UPPER PRO FORM UPPER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE apt. 100-946; .018x.025 UPPER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE apt. 100-947; .019x.025 UPPER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE apt. 100-948; .021x.025 UPPER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE apt. 100-949; .016 LOWER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE apt. 100-951; .018 LOWER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE apt. 100-952; .016x.022 LOWER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE apt. 100-954; .017x.025 LOWER PRO FORM BETA CNA

ARCHWIRE арт. 100-955; .018x.018 LOWER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE арт. 100-956; .018x.025 LOWER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE арт. 100-957; .019x.025 LOWER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE арт. 100-958; .021x.025 LOWER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE арт. 100-959; .016x.016 UPPER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE арт. 100-960; .016x.016 LOWER PRO FORM BETA CNA ARCHWIRE арт. 100-961.

32. Дуги ортодонтические бета-титановые CNA INTRUSION ARCH.

Количество в упаковке: по 5 шт.

Варианты исполнения:

.016x.022 UPPER/LONG CNA INTRUSION ARCH арт. 100-971; .016x.022 LOWER/LONG CNA INTRUSION ARCH арт. 100-973; .017x.025 UPPER/LONG CNA INTRUSION ARCH арт. 100-975; .017x.025 LOWER/LONG CNA INTRUSION ARCH арт. 100-977.

33. Дуги ортодонтические бета-титановые CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE.

Количество в упаковке: по 5 шт.

Варианты исполнения:

.016 CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE арт. 101-003; .018 CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE арт. 101-004; .032 CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE арт. 101-022; .036 CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE арт. 101-024; .016x.016 CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE арт. 101-007; .016x.022 CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE арт. 101-008; .017x.025 CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE арт. 101-009; .018x.018 CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE арт. 101-010; .018x.025 CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE арт. 101-011; .019 x.025 CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE арт. 101-012; .021x.025 CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE арт. 101-013.

34. Дуги ортодонтические бета-титановые CNA OVAL ARCH III.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016 UPPER CNA OVAL ARCH III арт. 101-504; .016 LOWER CNA OVAL ARCH III арт. 101-505; .018 UPPER CNA OVAL ARCH III арт. 101-506; .018 LOWER CNA OVAL ARCH III арт. 101-507; .016x.022 UPPER CNA OVAL ARCH III арт. 101-512; .016x.022 LOWER CNA OVAL ARCH III арт. 101-513; .017x.025 UPPER CNA OVAL ARCH III арт. 101-514; .017x.025 LOWER CNA OVAL ARCH III арт. 101-515; .018x.018 UPPER CNA OVAL ARCH III арт. 101-516; .018x.018 LOWER CNA OVAL ARCH III арт. 101-517; .018x.025 UPPER CNA OVAL ARCH III арт. 101-518; .018x.025 LOWER CNA OVAL ARCH III арт. 101-519; .019x.025 UPPER CNA OVAL ARCH III арт. 101-520; .019x.025 LOWER CNA OVAL ARCH III арт. 101-521.

35. Дуга ортодонтическая бета-титановая M-Series Beta Titanium D-LX.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения

M-THREE BETA .019x.025 M-Series Beta Titanium D-LX Archwire w/EZ Stops арт. 103-M3B.

36. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая Cu Nitanium 35° D-LX R.C.S. Straight Leg.

Количество в упаковке: по 5 шт.

Варианты исполнения:

.016x.025 Cu Nitanium 35° D-LX R.C.S. Straight Leg арт. 103-186.

37. Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu Nitanium 27°.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.013 Cu Nitanium 27°D-LX Archwire арт. 103-191; .013 Carriere Cu Nitanium 27° D-LX Archwire w/EZ Stops арт. 103-191C; .013 Cu Nitanium 27°D-LX Archwire w/Stops арт. 103-191ST; .014 Cu Nitanium 27°D-LX Archwire арт. 103-192; .014 Carriere Cu Nitanium 27° D-LX Archwire w/EZ Stops арт. 103-192C; .014 Cu Nitanium 27°D-LX Archwire w/Stops арт. 103-192ST; .016 Cu Nitanium 27°D-LX Archwire арт. 103-193; .016 Cu Nitanium 27°D-LX Archwire w/Stops арт. 103-193ST; .018 Cu Nitanium 27°D-LX Archwire арт. 103-194; .018 Cu Nitanium

27°D-LX Archwire w/Stops apr. 103-194ST; .014x.025 Cu Nitantium 27°D-LX Archwire apr. 103-195; .014x.025 Carriere Cu Nitantium 27°D-LX Archwire w/ EZ Stops apr. 103-195C; .014x.025 Cu Nitantium 27°D-LX Archwire w/Stops apr. 103-195ST; .016x.025 Cu Nitantium 27°D-LX Archwire apr. 103-196; .016x.025 Cu Nitantium 27°D-LX Archwire w/Stops apr. 103-196ST; .017x.025 Cu Nitantium 27°D-LX Archwire apr. 103-197; .017x.025 Cu Nitantium 27°D-LX Archwire w/Stops apr. 103-197ST; .018x.025 Cu Nitantium 27°D-LX Archwire apr. 103-198; .018x.025 Cu Nitantium 27°D-LX Archwire w/Stops apr. 103-198ST; .019x.025 Cu Nitantium 27°D-LX Archwire apr. 103-199; .019x.025 Cu Nitantium 27°D-LX Archwire w/Stops apr. 103-199ST; .014 Upper Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-142; .014 Lower Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-143; .016 Upper Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-144; .016 Lower Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-145; .018 Upper Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-146; .018 Lower Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-147; .014x.025 Upper Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-148; .014x.025 Lower Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-149; .016x.022 Upper Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-150; .016x.022 Lower Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-151; .016x.025 Upper Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-152; .016x.025 Lower Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-153; .017x.025 Upper Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-154; .017x.025 Lower Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-155; .019x.025 Upper Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-158; .019x.025 Lower Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-159; .014 Upper Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-242; .014 Lower Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-243; .016 Upper Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-244; .016 Lower Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-245; .018 Upper Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-246; .018 Lower Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-247; .014x.025 Upper Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-248; .014x.025 Lower Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-249; .016x.022 Upper Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-250; .016x.022 Lower Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-251; .016x.025 Upper Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-252; .016x.025 Lower Dimpled Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apr. 109-253; .014 Upper Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-342; .014 Lower Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-343; .016 Upper Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-344; .016 Lower Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-345; .018 Upper Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-346; .018 Lower Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-347; .014x.025 Upper Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-348; .014x.025 Lower Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-349; .016x.022 Upper Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-350; .016x.022 Lower Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-351; .016x.025 Upper Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-352; .016x.025 Lower Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-353; .017x.025 Upper Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-354; .017x.025 Lower Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-355; .019x.025 Upper Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-358; .019x.025 Lower Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-359; .014 Upper Dimpled Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-442; .014 Lower Dimpled Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-443; .016 Upper Dimpled Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-444; .016 Lower Dimpled Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-445; .018 Upper Dimpled Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-446; .018 Lower Dimpled Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-447; .014x.025 Upper Dimpled Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-448; .014x.025 Lower Dimpled Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-449; .016x.022 Upper Dimpled Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-450; .016x.022 Lower Dimpled Cu Nitantium 27°Oval Arch Form III Archwire apr. 109-451;

.016x.025 Upper Dimpled Cu Nitantium 27° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-452; .016x.025 Lower Dimpled Cu Nitantium 27° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-453.

38. Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu Nitantium 27°.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.014 U Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-542; .014 L Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-543; .016 U Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-544; .016 L Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-545; .018 U Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-546; .018 L Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-547; .014x.025 U Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-548; .014x.025 L Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-549; .016x.022 U Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-550; .016x.022 L Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-551; .016x.025 U Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-552; .016x.025 L Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-553; .017x.025 U Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-554; .017x.025 L Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-555; .019x.025 U Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-558; .019x.025 L Cu Nitantium 27° Pro Form Archwire apt. 109-559.

39. Дуги ортодонтические медь-никель-титановые CuNitantium 35°.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.017x.025 Cu Nitantium 35° D-LX Archwire apt. 103-200; .017x.025 Carriere Cu Nitantium 35° D-LX Archwire w/ EZ Stops apt. 103-200C; .017x.025 Cu Nitantium 35° D-LX Archwire w/ Stops apt. 103-200ST; .019x.025 Cu Nitantium 35° D-LX Archwire apt. 103-201; .019x.025 Carriere Cu Nitantium 35° D-LX Archwire w/ EZ Stops apt. 103-201C; .019x.025 CuNitantium 35° D-LX Archwire w/ Stops apt. 103-201ST; .016 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-162; .016 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-163; .018 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-164; .018 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-165; .016x.022 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-168; .016x.022 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-169; .017x.017 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-170; .017 x .017 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-171; .017 x.025 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-172; .017x.025 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-173; .018x.025 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-174; .018x.025 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-175; .019x.025 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-176; .019x.025 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-177; .020x.020 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-178; .020x.020 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-179; .016 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-262; .016 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-263; .018 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-264; .018 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-265; .016x.022 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-268; .016x.022 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-269; .017x.017 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-270; .017x.017 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-271; .017x.025 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-272; .017x.025 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-273; .018x.025 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-274; .018x.025 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-275; .019x.025 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-276; .019x.025 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-277; .020 x.020 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-278; .020x.020 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-279; .016 Upper Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-362; .016 Lower Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-363; .018 Upper Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-364; .018 Lower Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-365; .016x.022 Upper Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-368; .016x.022 Lower

Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-369; .017x.017 Upper Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-370; .017x.017 Lower Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-371; .017x.025 Upper Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-372; .017x.025 Lower Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-373; .018x.025 Upper Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-374; .018x.025 Lower Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-375; .019x.025 Upper Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-376; .019x.025 Lower Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-377; .020x.020 Upper Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-378; .020x.020 Lower Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-379.

40. Дуги ортодонтические медь-никель-титановые CuNitantium 35° Oval Arch Form III.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-462; .016 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-463; .018 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-464; .018 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-465; .016x.022 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-468; .016x.022 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-469; .017x.017 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-470; .017x.017 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-471; .017x.025 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-472; .017x.025 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-473; .018 x.025 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-474; .018x.025 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-475; .019x.025 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-476; .019x.025 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-477; .020x.020 Upper Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-478; .020x.020 Lower Dimpled Cu Nitantium 35° Oval Arch Form III Archwire apt. 109-479.

41. Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения

.016 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-562; .016 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-563; .018 Upper U Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-564; .018 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-565; .016x.022 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-568; .016x.022 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-569; .017x.017 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-570; .017x.017 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-571; .017x.025 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-572; .017x.025 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-573; .018 x.025 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-574; .018x.025 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-575; .019x.025 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-576; .019x.025 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-577; .020x.020 Upper Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-578; .020x.020 Lower Cu Nitantium 35° Pro Form Archwire apt. 109-579.

42. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая M-Series CuNitantium 27°D-LX EZ Stops.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

M-ONE .015 M-Series Cu Nitantium 27°D-LX Archwire w/ EZ Stops apt. 103-M1; M-ONE .018 M-Series Cu Nitantium 27°D-LX Archwire w/EZ Stops apt.103-M1.5.

43. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая M-Series CuNitantium 35°D-LX Archwire EZ Stops.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

M-TWO .020x.020 M-Series CuNitanium 35°D-LX Archwire w /EZ Stops apt. 103-M2; M TWO. FIVE .019x.025 M-Series CuNitanium 35°D-LX Archwire w /EZ Stops apt. 103M2.5.

44. Дуги ортодонтические титан-молибденовые D-LX CNA.

Количество в упаковке: по 10 шт.

Варианты исполнения:

.016x.025 D-LX Shape CNA Beta III Wire apt. 103-118; .017x.025 D-LX Shape CNA Beta III Wire apt. 103-119; .019x.025 D-LX Shape CNA Beta III Wire apt. 103-120; .019x.025 Carriere D-LX Shape CNA Beta III Wire apt. 103-120C.

2. Сведения о производителе.

Разработчик: Орто Органайзерс, Инк. (Ortho Organizers, Inc.), США.

Производитель: Орто Органайзерс, Инк. (Ortho Organizers, Inc.), США.

Адрес места производства: 92008, штат Калифорния, Карлсбад, Эстон Авеню, 1822, США (1822, Aston Avenue, Carlsbad, CA 92008, USA).

3. Назначение и область применения.

Дуги ортодонтические (далее по тексту – дуги, -а) используется для фиксации брекетов или буккальных трубок, для ортодонтического лечения неправильного прикуса.

Область применения: стоматология.

Условия применения: это изделие предназначено для использования исключительно обученными и квалифицированными врачами-стоматологами и врачами-ортодонтами.

4. Классификация медицинского изделия.

В зависимости от степени потенциального риска применения в соответствии с ГОСТ Р 51609-2000 «классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования» и приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н» Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий», зарегистрированным в Минюсте России 09.07.2012 № 24852, в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС медицинское изделие «Дуги ортодонтические, варианты исполнения», производства Орто Органайзерс, Инк. (Ortho Organizers, Inc.), США, относится к классу 1.

Вид номенклатурной классификации: **236310 (Изделия ортодонтические. Дуга проволочная ортодонтическая Стоматологическая проволока, используемая с ортодонтическими устройствами, фиксируемая на коронках двух или более зубов, вызывая или направляя их движения).**

5. Показания.

Изделие предназначено для фиксации брекетов или буккальных трубок, для ортодонтического лечения неправильного прикуса.

6. Противопоказания.

Скелетные нарушения.

Аллергическая чувствительность к материалам, из которых изготовлены изделия.

7. Меры предосторожности.

При выявлении аллергической реакции на какие-либо компоненты не использовать.

8. Побочные эффекты.

Аллергическая реакция на материалы.

9. Примечания по технике безопасности/Предупреждения.


- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Федеральный закон (США) разрешает продажу данного продукта только стоматологам и по их назначению.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Обработка дуг зубчатыми или остро заточенными инструментами может повредить проволоку, что может привести к поломке во время лечения. Для правильной обработки и установки используйте только инструменты с гладкими губками.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – эти изделия содержат никель и хром, и не должны использоваться для людей с известной аллергической реакцией на данные материалы.
- Повторное использование запрещено.
- Данное изделие предназначено для одноразового использования. Эффекты от повторного использования клинически не протестированы и отсутствуют данные о том, что изделие будет функционировать по назначению после многократного использования.

10. Материалы, используемые при производстве.

1. Нержавеющая сталь марки 17-4, производства фирмы «Ryer, Inc.» (США) – дуга;
2. Сплав (CAS 7440-02-0), производства фирмы «Ortho Organizers, Inc.» (США) следующего состава: никель – 60%, титан - 40%; – дуга;
3. Сплав (CAS 7440-32-6), производства фирмы «Ortho Organizers, Inc.» (США) следующего состава: титан - 50%, молибден - 35%, цирконий - 10%, олово - 5%; – дуга;
4. Сплав (CAS 7440-50-8), производства фирмы «Ortho Organizers, Inc.» (США) следующего состава: медь - 5%, никель - 45%, титан - 50%; – дуга;
5. Сплав (CAS 7439-98-7), производства фирмы «Ortho Organizers, Inc.» (США) следующего состава: титан - 60%, молибден - 40%; – дуга.


11. Технические характеристики изделия.

11.1. Дуги ортодонтические стальные KEYHOLE ARCH-2 LOOP.

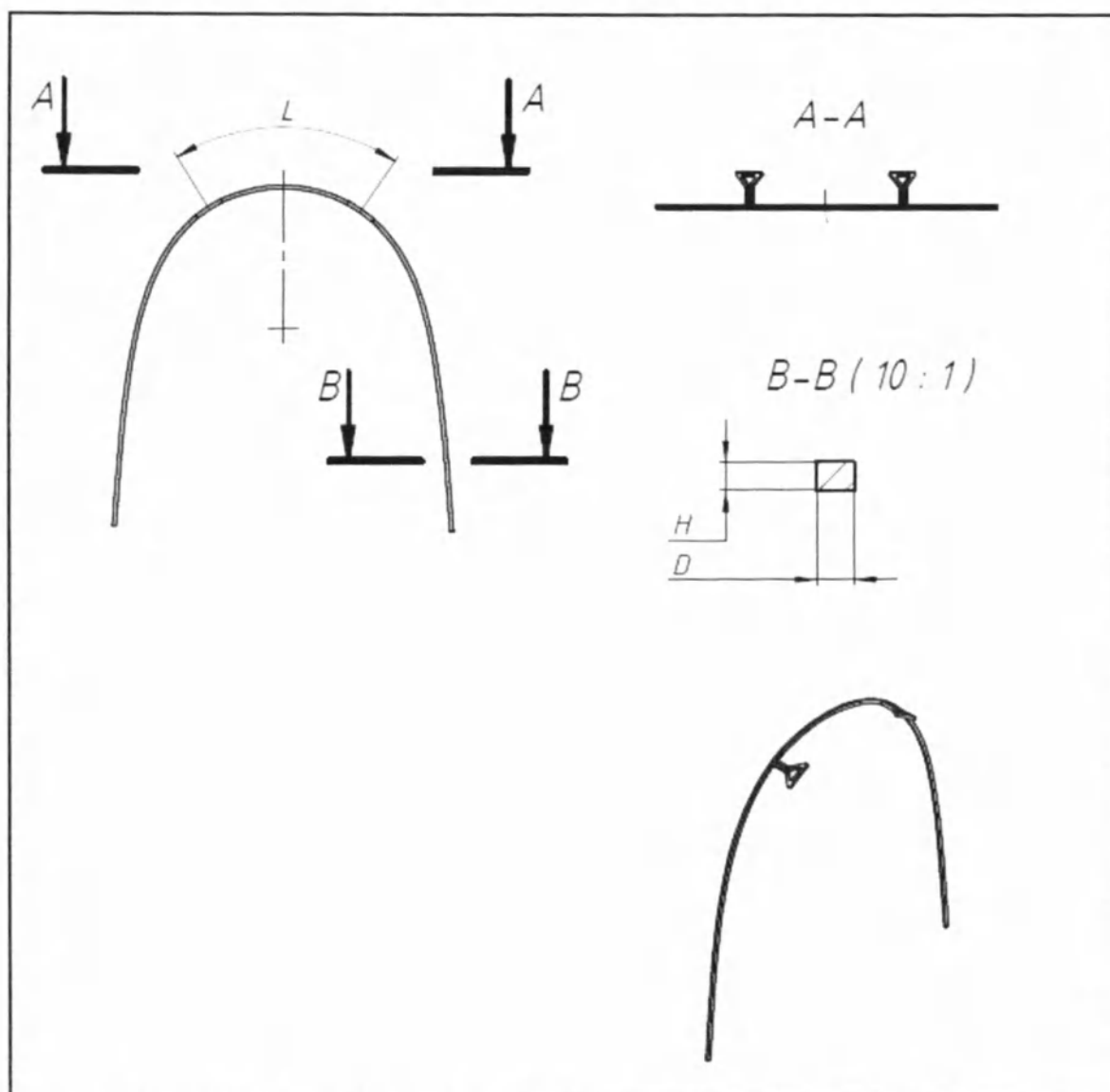

Дуги ортодонтические стальные KEYHOLE ARCH-2 LOOP


Номер по каталогу	Размеры (мм)					Масса (г)	
	Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Длина дуги (L)	Масса	±Доп.
125-121	0,41	0,01	0,56	0,01	22	0,31	20%
125-122	0,41	0,01	0,56	0,01	24	0,31	20%
125-123	0,41	0,01	0,56	0,01	26	0,31	20%
125-124	0,41	0,01	0,56	0,01	28	0,31	20%
125-125	0,41	0,01	0,56	0,01	30	0,31	20%
125-126	0,41	0,01	0,56	0,01	32	0,31	20%
125-127	0,41	0,01	0,56	0,01	34	0,31	20%
125-128	0,41	0,01	0,56	0,01	36	0,31	20%
125-129	0,41	0,01	0,56	0,01	38	0,31	20%
125-130	0,41	0,01	0,56	0,01	40	0,31	20%
125-131	0,41	0,01	0,56	0,01	42	0,31	20%
125-132	0,41	0,01	0,56	0,01	44	0,31	20%

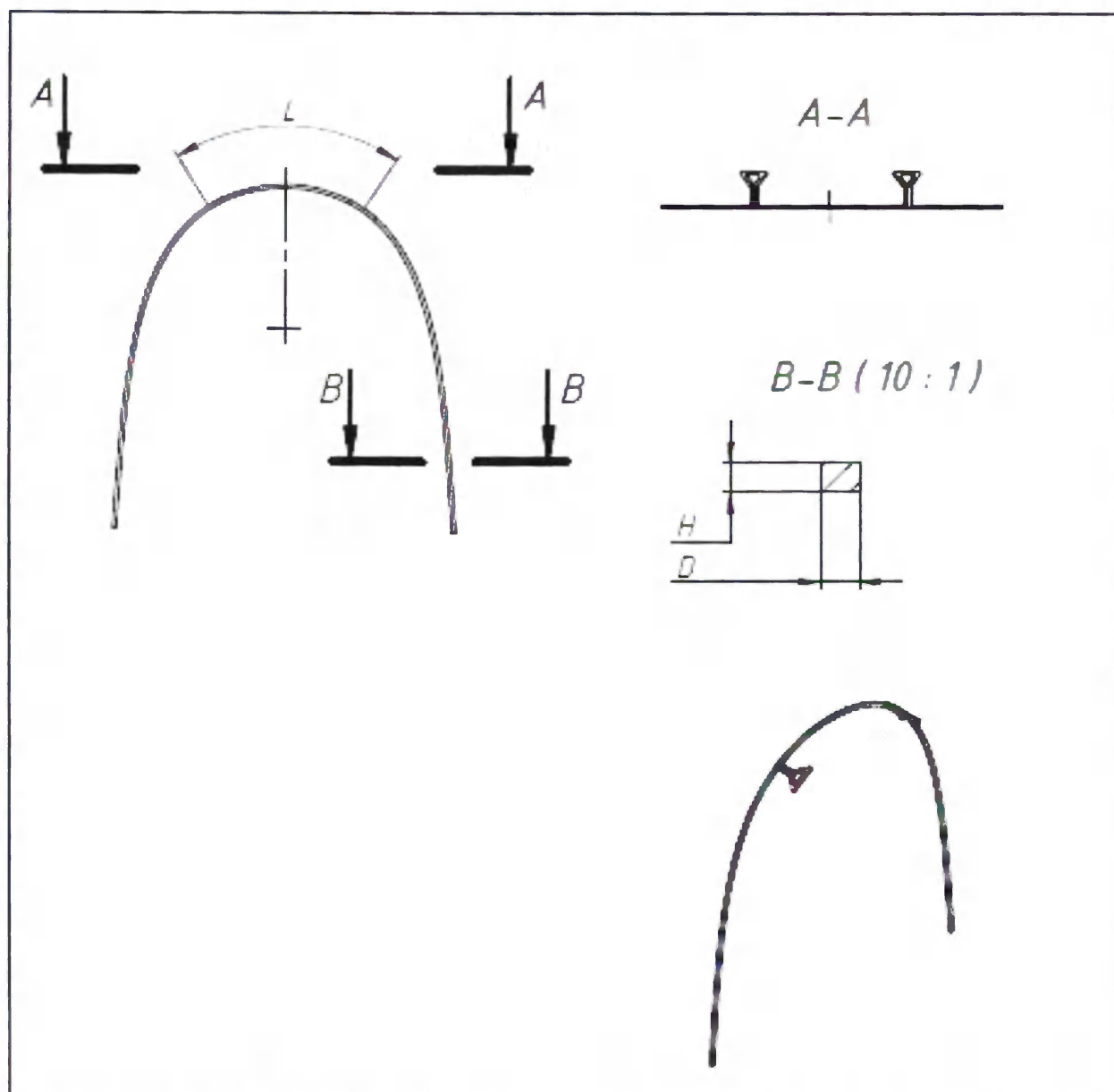

Дуги ортодонтические стальные KEYHOLE ARCH-2 LOOP


Номер по каталогу	Размеры (мм)					Масса (г)	
	Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Длина дуги (L)	Масса	±Доп.
125-181	0,48	0,01	0,64	0,01	22	0,36	20%
125-182	0,48	0,01	0,64	0,01	24	0,36	20%
125-183	0,48	0,01	0,64	0,01	26	0,36	20%
125-184	0,48	0,01	0,64	0,01	28	0,36	20%
125-185	0,48	0,01	0,64	0,01	30	0,36	20%
125-186	0,48	0,01	0,64	0,01	32	0,36	20%
125-187	0,48	0,01	0,64	0,01	34	0,36	20%
125-188	0,48	0,01	0,64	0,01	36	0,36	20%
125-189	0,48	0,01	0,64	0,01	38	0,36	20%
125-190	0,48	0,01	0,64	0,01	40	0,36	20%
125-191	0,48	0,01	0,64	0,01	42	0,36	20%
125-192	0,48	0,01	0,64	0,01	44	0,36	20%

11.2. Дуги ортодонтические стальные KEYHOLE ARCH-4 LOOP.

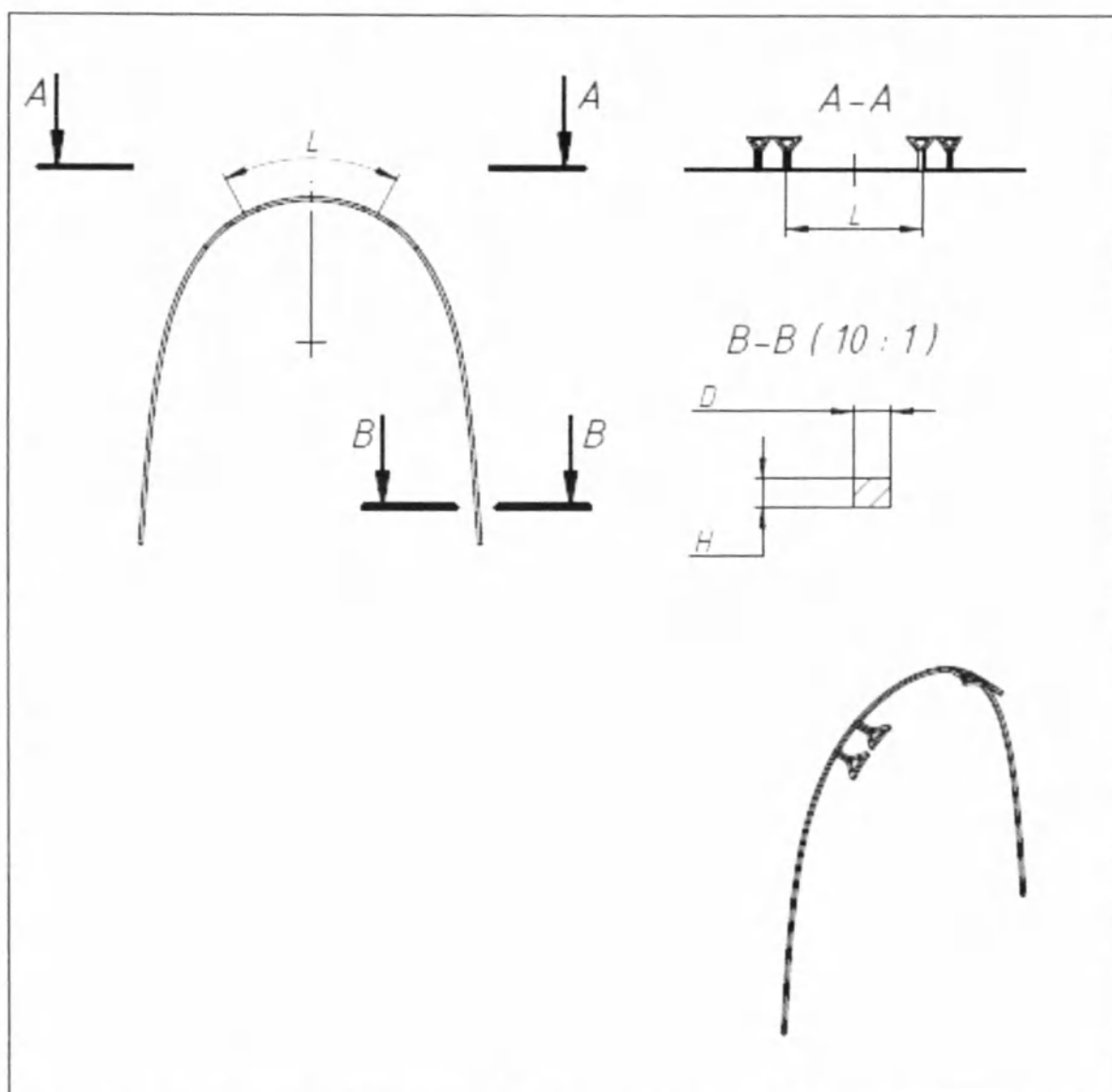


Дуги ортодонтические стальные KEYHOLE ARCH-4 LOOP

Номер по каталогу	Размеры (мм)					Масса (г)	
	Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Длина дуги (L)	Масса	±Доп.
126-121	0,41	0,01	0,56	0,01	22	0,35	20%
126-122	0,41	0,01	0,56	0,01	24	0,35	20%
126-123	0,41	0,01	0,56	0,01	26	0,35	20%
126-124	0,41	0,01	0,56	0,01	28	0,35	20%
126-125	0,41	0,01	0,56	0,01	30	0,35	20%
126-126	0,41	0,01	0,56	0,01	32	0,35	20%
126-127	0,41	0,01	0,56	0,01	34	0,35	20%
126-128	0,41	0,01	0,56	0,01	36	0,35	20%
126-129	0,41	0,01	0,56	0,01	38	0,35	20%
126-130	0,41	0,01	0,56	0,01	40	0,35	20%
126-131	0,41	0,01	0,56	0,01	42	0,35	20%
126-132	0,41	0,01	0,56	0,01	44	0,35	20%

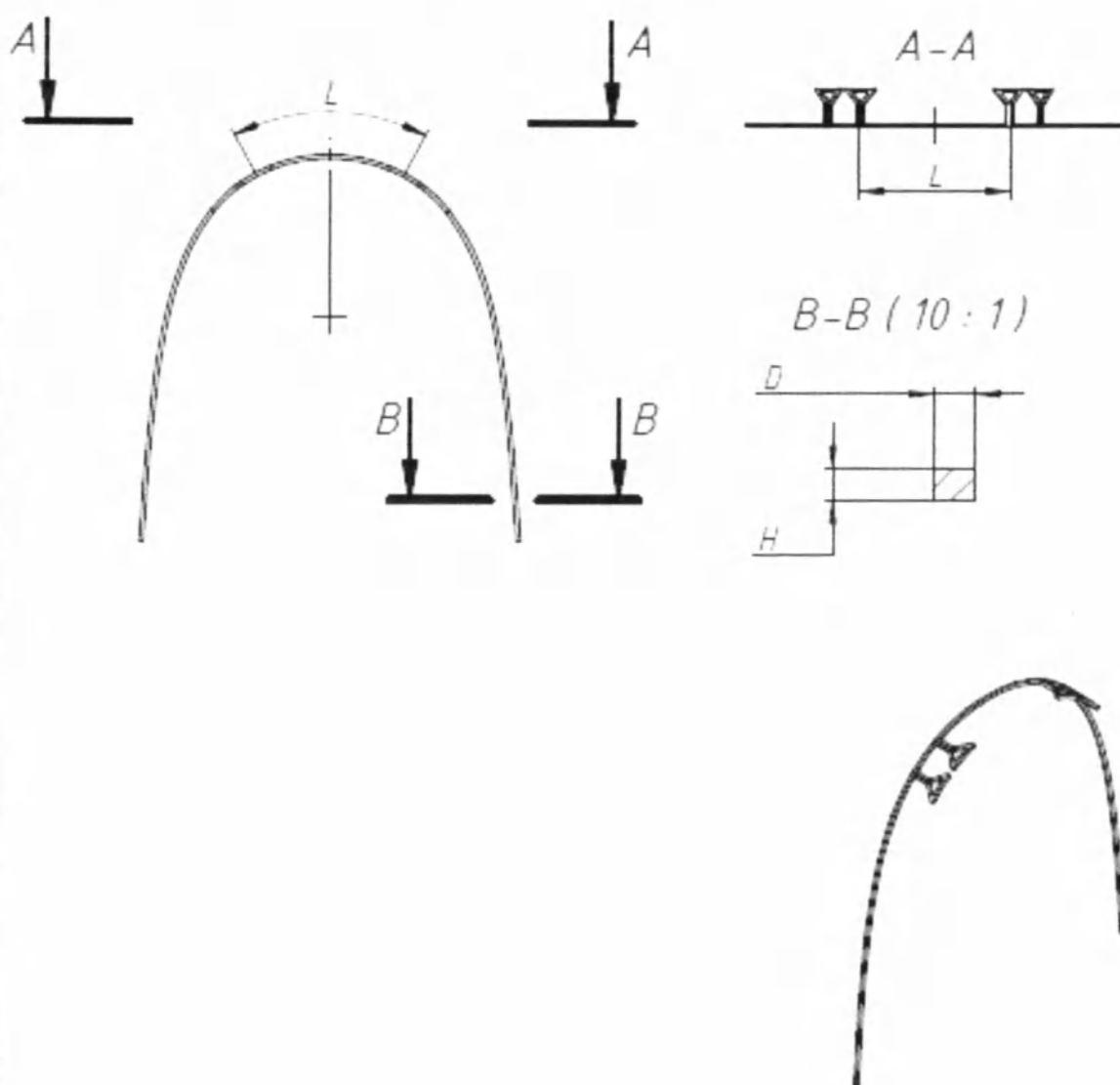

Дуги ортодонтические стальные KEYHOLE ARCH-4 LOOP


Номер по каталогу	Размеры (мм)					Масса (г)	
	Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Длина дуги (L)	Масса	±Доп.
126-141	0,43	0,01	0,64	0,01	22	0,36	20%
126-142	0,43	0,01	0,64	0,01	24	0,36	20%
126-143	0,43	0,01	0,64	0,01	26	0,36	20%
126-144	0,43	0,01	0,64	0,01	28	0,36	20%
126-145	0,43	0,01	0,64	0,01	30	0,36	20%
126-146	0,43	0,01	0,64	0,01	32	0,36	20%
126-147	0,43	0,01	0,64	0,01	34	0,36	20%
126-148	0,43	0,01	0,64	0,01	36	0,36	20%
126-149	0,43	0,01	0,64	0,01	38	0,36	20%
126-150	0,43	0,01	0,64	0,01	40	0,36	20%
126-151	0,43	0,01	0,64	0,01	42	0,36	20%
126-152	0,43	0,01	0,64	0,01	44	0,36	20%

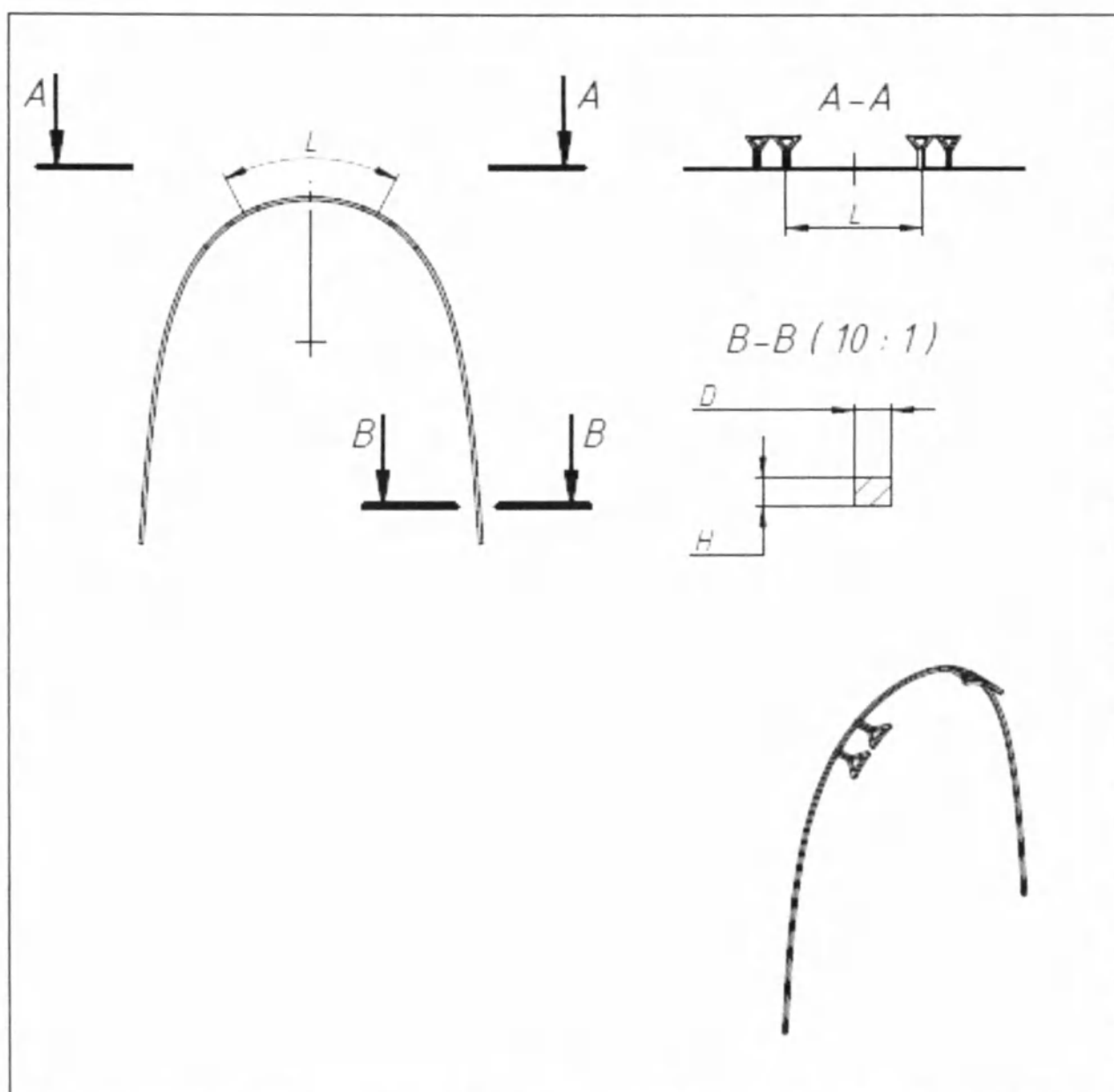

Дуги ортодонтические стальные KEYHOLE ARCH-4 LOOP


Номер по каталогу	Размеры (мм)					Масса (г)	
	Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Длина дуги (L)	Масса	±Доп.
126-181	0,48	0,01	0,64	0,01	22	0,44	20%
126-182	0,48	0,01	0,64	0,01	24	0,44	20%
126-183	0,48	0,01	0,64	0,01	26	0,44	20%
126-184	0,48	0,01	0,64	0,01	28	0,44	20%
126-185	0,48	0,01	0,64	0,01	30	0,44	20%
126-186	0,48	0,01	0,64	0,01	32	0,44	20%
126-187	0,48	0,01	0,64	0,01	34	0,44	20%
126-188	0,48	0,01	0,64	0,01	36	0,44	20%
126-189	0,48	0,01	0,64	0,01	38	0,44	20%
126-190	0,48	0,01	0,64	0,01	40	0,44	20%
126-191	0,48	0,01	0,64	0,01	42	0,44	20%
126-192	0,48	0,01	0,64	0,01	44	0,44	20%

11.3. Дуги ортодонтические стальные T-LOOP ARCH -2 LOOP.

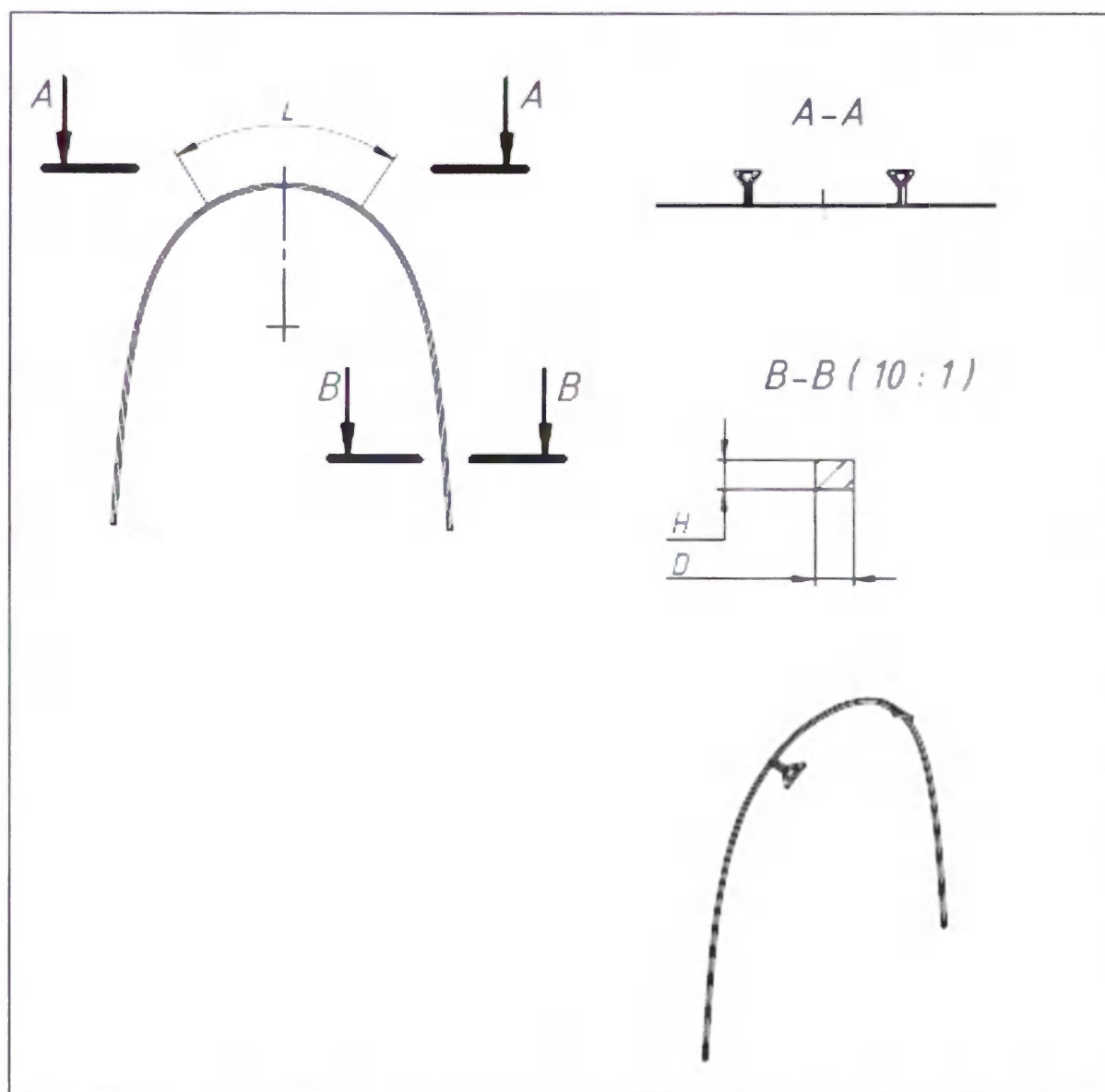


Дуги ортодонтические стальные T-LOOP ARCH -2 LOOP

Номер по каталогу	Размеры (мм)					Масса (г)	
	Высота (H)	±Доп	Глубина (D)	±Доп	Длина дуги (L)	Масса	±Доп
125-302	0,41	0,01	0,56	0,01	22	0,35	20%
125-303	0,41	0,01	0,56	0,01	24	0,35	20%
125-304	0,41	0,01	0,56	0,01	26	0,35	20%
125-305	0,41	0,01	0,56	0,01	28	0,35	20%
125-306	0,41	0,01	0,56	0,01	30	0,35	20%
125-307	0,41	0,01	0,56	0,01	32	0,35	20%
125-308	0,41	0,01	0,56	0,01	34	0,35	20%
125-309	0,41	0,01	0,56	0,01	36	0,35	20%
125-310	0,41	0,01	0,56	0,01	38	0,35	20%
125-311	0,41	0,01	0,56	0,01	40	0,35	20%
125-312	0,41	0,01	0,56	0,01	42	0,35	20%
125-313	0,41	0,01	0,56	0,01	44	0,35	20%

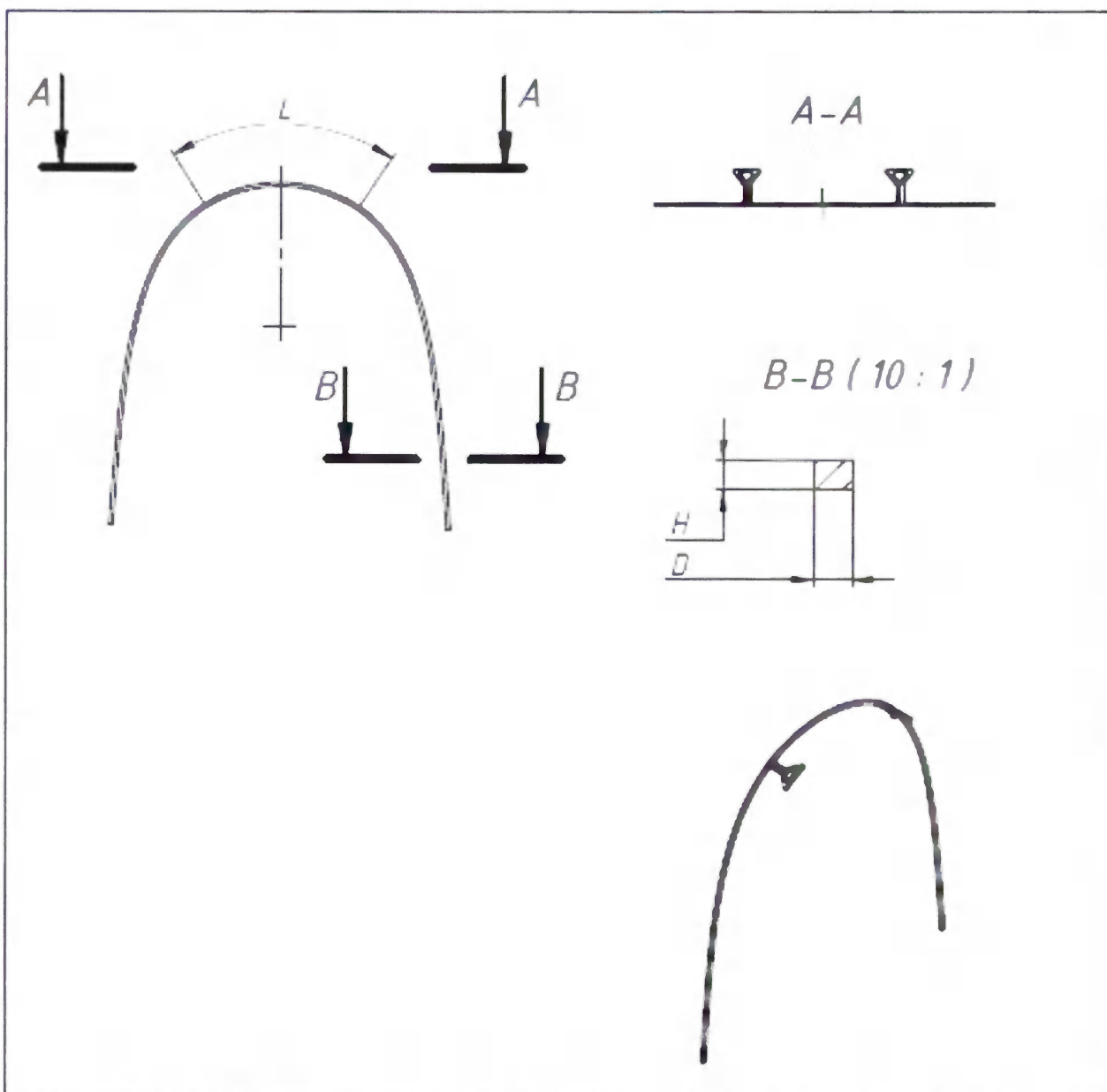

Дуги ортодонтические стальные T-LOOP ARCH - 2 LOOP


Номер по каталогу	Размеры (мм)					Масса (г)	
	Высота (H)	±Доп	Глубина (D)	±Доп	Длина дуги (L)	Масса	±Доп
125-322	0,43	0,01	0,64	0,01	22	0,36	20%
125-323	0,43	0,01	0,64	0,01	24	0,36	20%
125-324	0,43	0,01	0,64	0,01	26	0,36	20%
125-325	0,43	0,01	0,64	0,01	28	0,36	20%
125-326	0,43	0,01	0,64	0,01	30	0,36	20%
125-327	0,43	0,01	0,64	0,01	32	0,36	20%
125-328	0,43	0,01	0,64	0,01	34	0,36	20%
125-329	0,43	0,01	0,64	0,01	36	0,36	20%
125-330	0,43	0,01	0,64	0,01	38	0,36	20%
125-331	0,43	0,01	0,64	0,01	40	0,36	20%
125-332	0,43	0,01	0,64	0,01	42	0,36	20%
125-333	0,43	0,01	0,64	0,01	44	0,36	20%

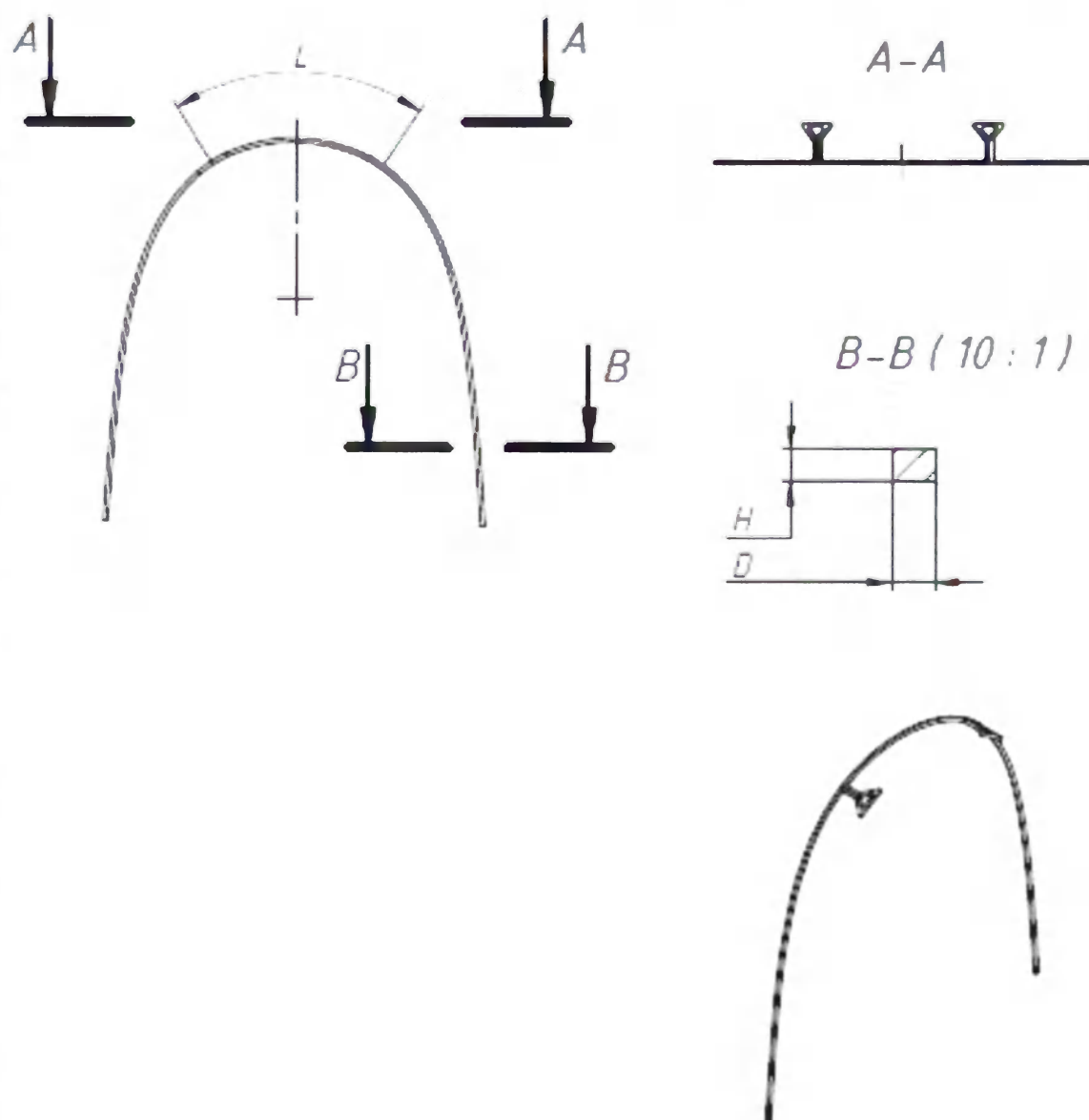

Дуги ортодонтические стальные T-LOOP ARCH-2 LOOP

Номер по каталогу	Размеры (мм)					Масса (г)	
	Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Длина дуги (L)	Масса	±Доп.
125-362	0,48	0,01	0,64	0,01	22	0,44	20%
125-363	0,48	0,01	0,64	0,01	24	0,44	20%
125-364	0,48	0,01	0,64	0,01	26	0,44	20%
125-365	0,48	0,01	0,64	0,01	28	0,44	20%
125-366	0,48	0,01	0,64	0,01	30	0,44	20%
125-367	0,48	0,01	0,64	0,01	32	0,44	20%
125-368	0,48	0,01	0,64	0,01	34	0,44	20%
125-369	0,48	0,01	0,64	0,01	36	0,44	20%
125-370	0,48	0,01	0,64	0,01	38	0,44	20%
125-371	0,48	0,01	0,64	0,01	40	0,44	20%
125-372	0,48	0,01	0,64	0,01	42	0,44	20%
125-373	0,48	0,01	0,64	0,01	44	0,44	20%


11.4. Дуги ортодонтические стальные BRT WIRE.

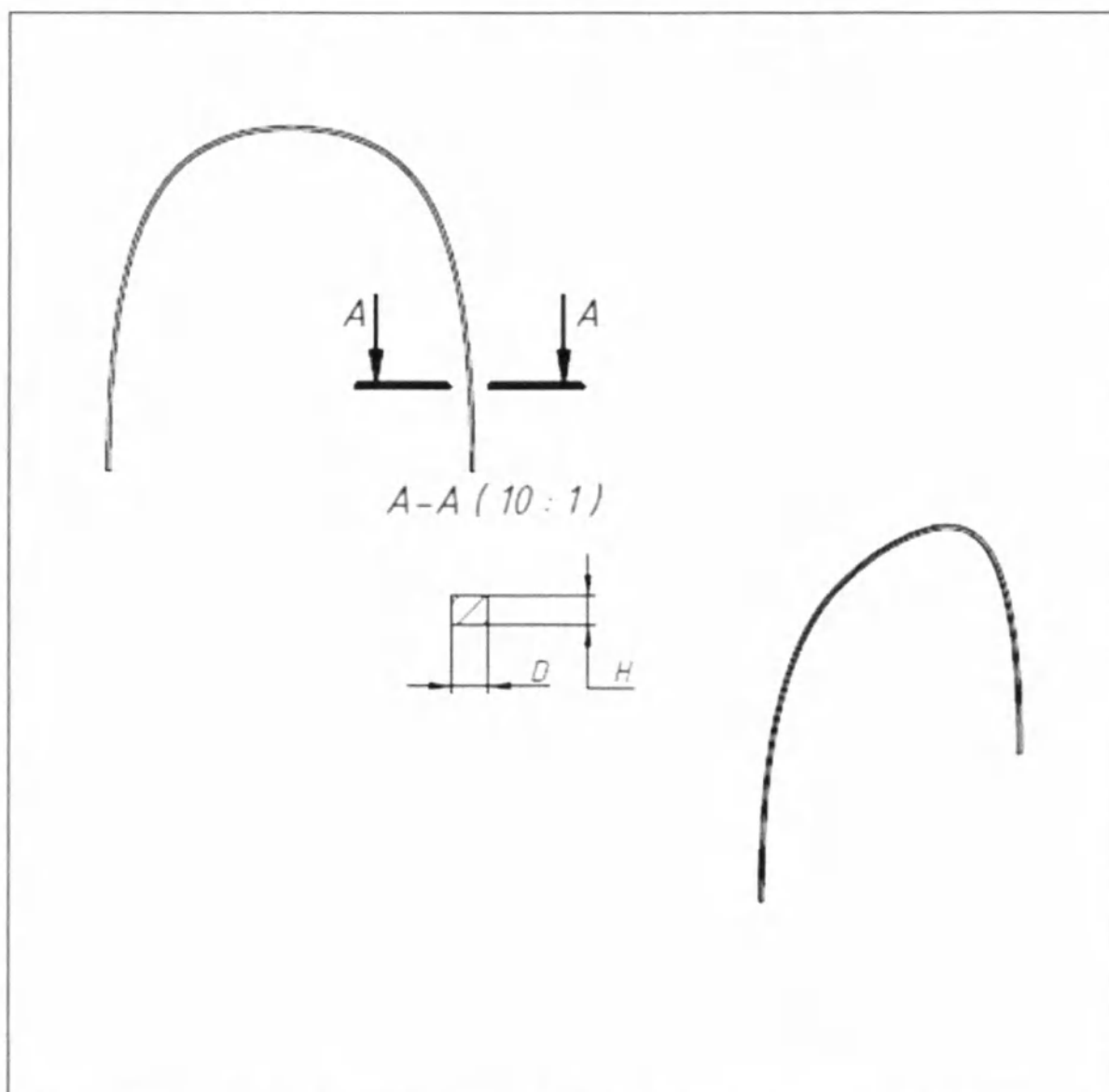

Дуги ортодонтические стальные BRT WIRE

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-144	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,20	20%
100-145	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,20	20%
100-146	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,21	20%
100-147	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,23	20%
100-148	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,25	20%
100-149	В	0,53	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
100-154	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,20	20%
100-155	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,20	20%
100-156	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,21	20%
100-157	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,23	20%
100-158	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,25	20%
100-159	Н	0,53	0,01	0,64	0,01	0,28	20%


11.5. Дуги ортодонтические стальные BRIGHT WIRE.

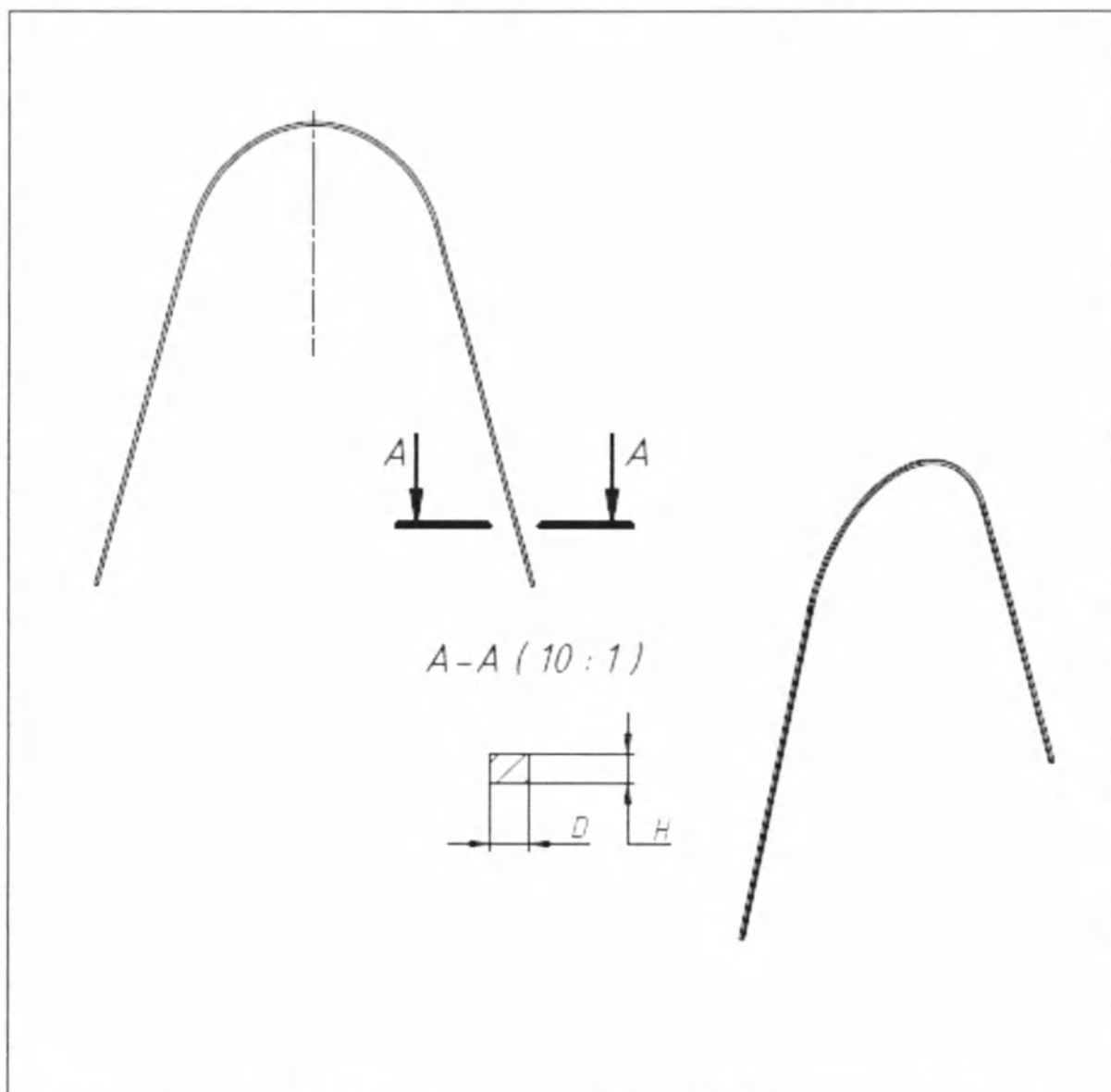

Дуги ортодонтические стальные BRIGHT WIRE

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-553	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,15	20%
100-554	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,15	20%
100-555	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,15	20%
100-556	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,15	20%
100-557	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,16	20%
100-558	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,16	20%
100-559	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,18	20%
100-560	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,18	20%
100-561	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,20	20%
100-562	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,20	20%
100-563	В	0,53	0,01	0,64	0,01	0,21	20%
100-564	Н	0,53	0,01	0,64	0,01	0,21	20%


11.6. Дуги ортодонтические стальные SS OVAL ARCH FORM.

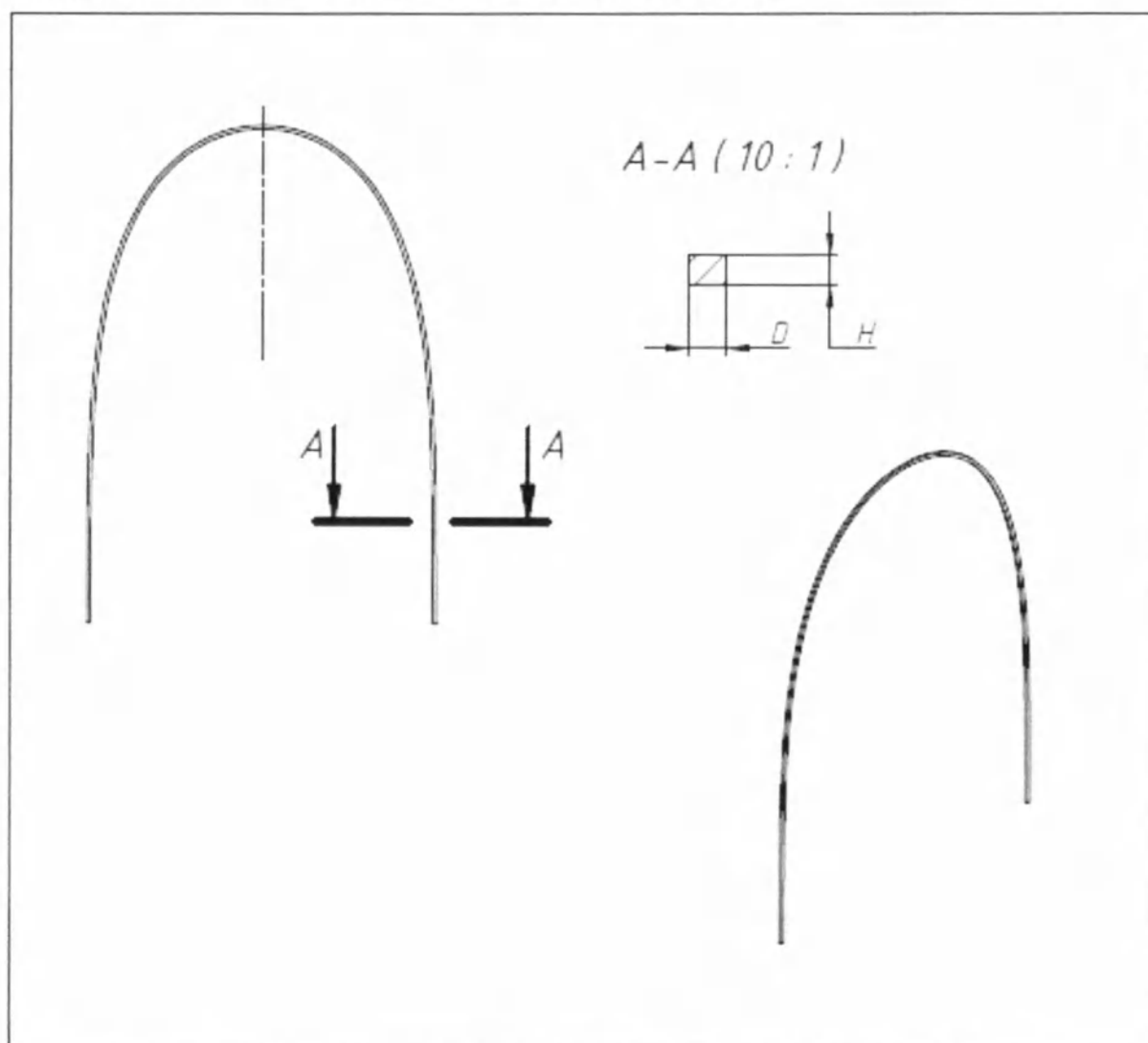

Дуги ортодонтические стальные SS OVAL ARCH FORM

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
101-410	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,33	20%
101-411	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,33	20%
101-412	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,33	20%
101-413	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,33	20%
101-414	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,34	20%
101-415	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,34	20%
101-416	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,36	20%
101-417	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,36	20%
101-418	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,36	20%
101-419	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,36	20%
101-420	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,37	20%
101-421	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,37	20%
101-422	В	0,53	0,01	0,64	0,01	0,39	20%
101-423	Н	0,53	0,01	0,64	0,01	0,39	20%


11.7. Дуги ортодонтические стальные PRO FORM COATED SS.

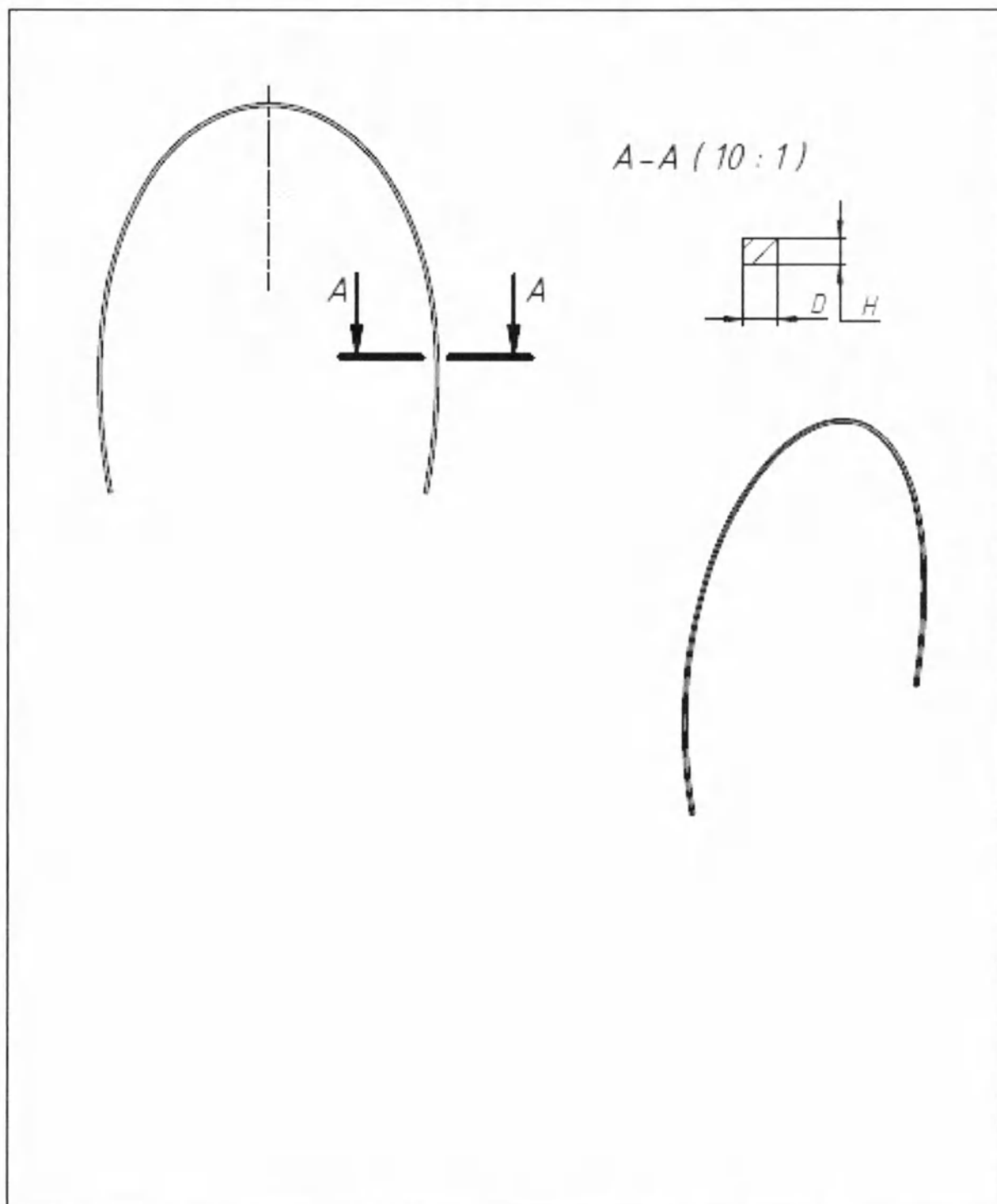

Дуги ортодонтические стальные PRO FORM COATED SS

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
101-174	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,24	20%
101-175	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,24	20%
101-176	В	0,46	0,01	0,61	0,01	0,25	20%
101-177	Н	0,46	0,01	0,61	0,01	0,25	20%
101-180	В	0,53	0,01	0,69	0,01	0,28	20%
101-181	Н	0,53	0,01	0,69	0,01	0,28	20%


11.8. Дуги ортодонтические стальные UTILITY ARCH.

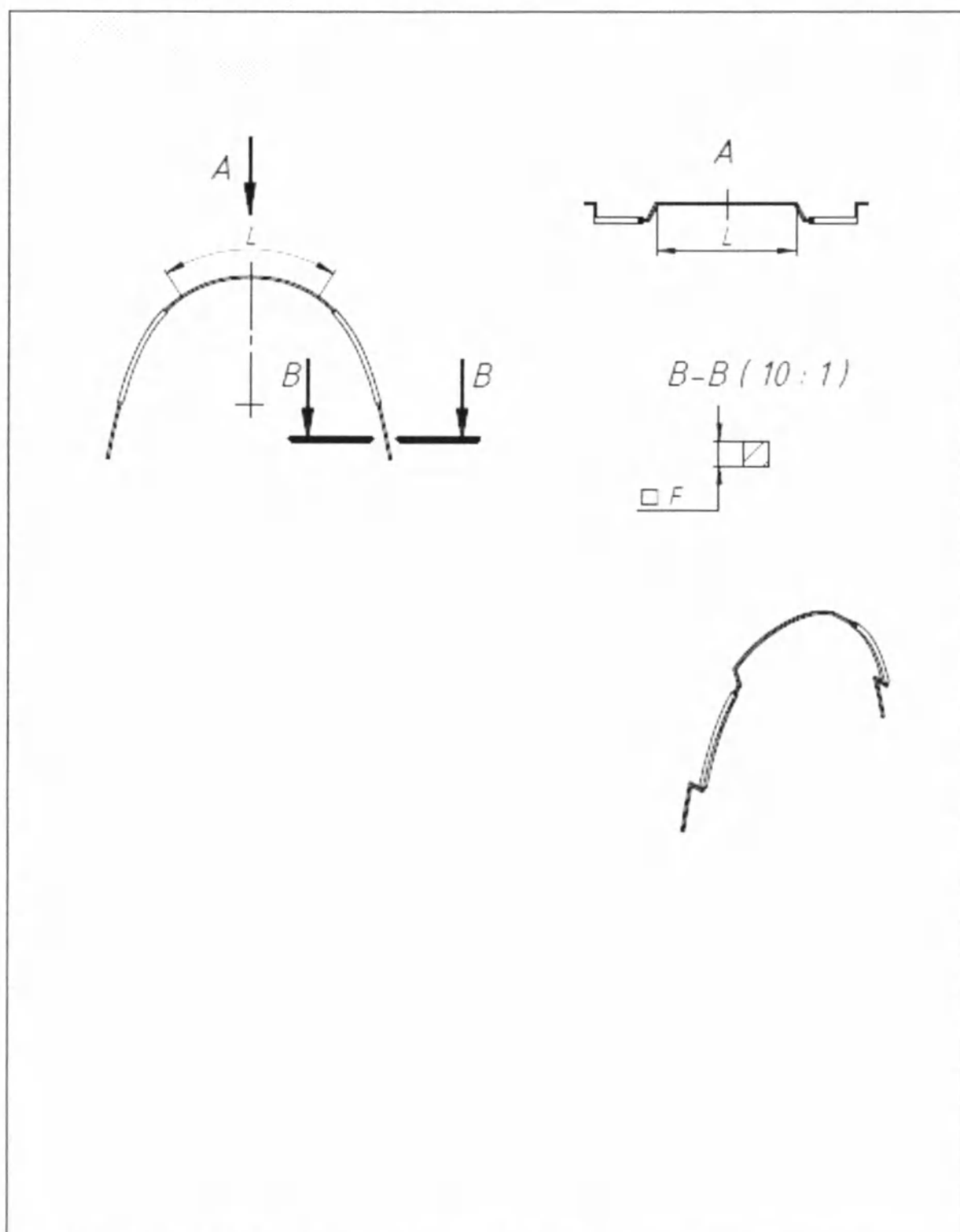

Дуги ортодонтические стальные Utility Arch

Номер по каталогу	Верхняя (В) / Нижняя (Н)	Размеры (мм)			Масса (г)	
		Грань (F)	±Доп.	Длина дуги (L)	Масса	±Доп.
100-314	—	0,41	0,01	28	0,31	20%
100-334	—	0,41	0,01	34	0,31	20%
100-338	—	0,41	0,01	38	0,31	20%
100-342	—	0,41	0,01	42	0,31	20%


11.9. Дуги ортодонтические стальные BRAIDED.

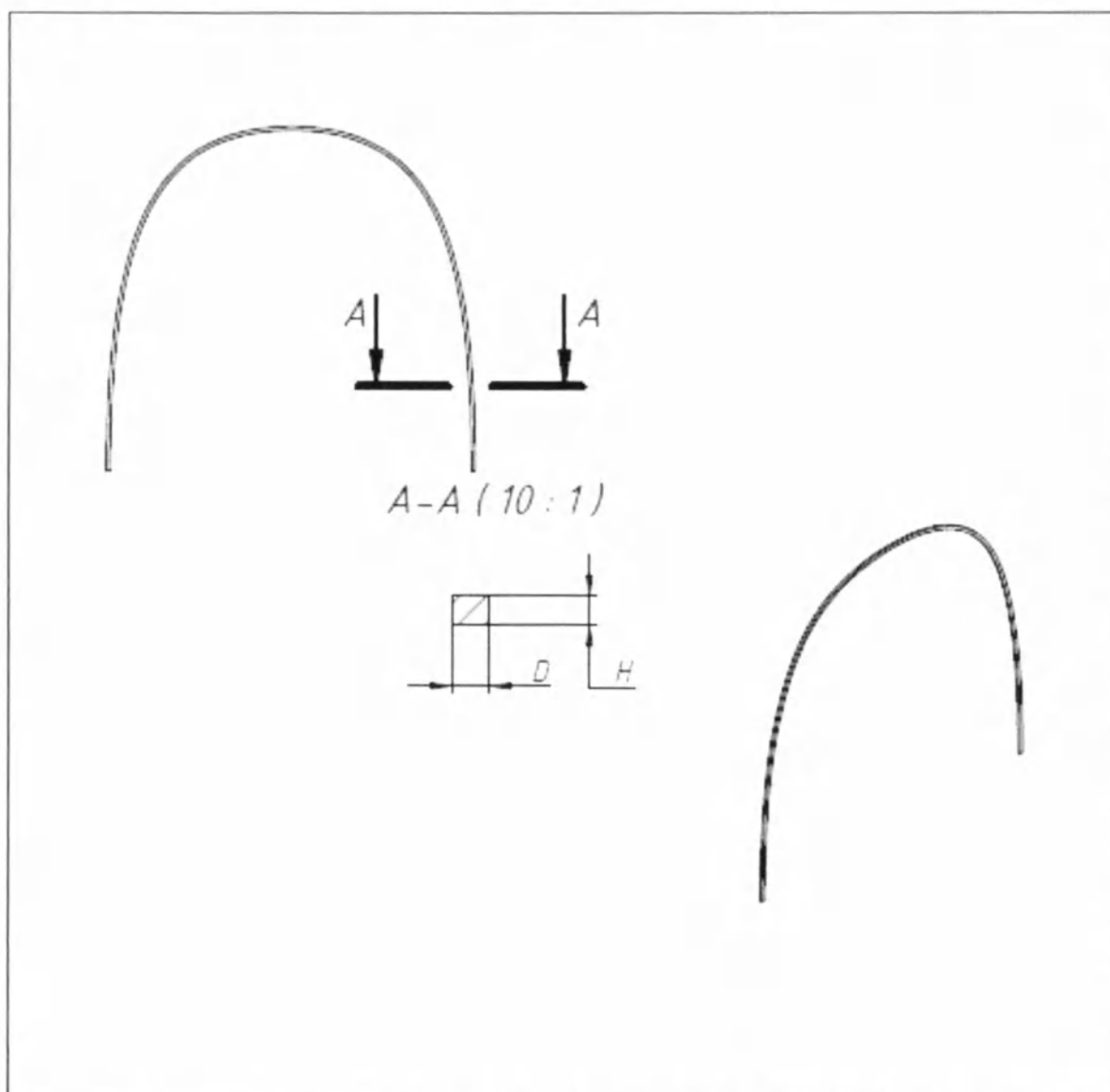

Дуги ортодонтические стальные BRAIDED

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-380	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,15	20%
100-381	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,15	20%
100-382	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,15	20%
100-383	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,15	20%
100-384	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,16	20%
100-385	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,16	20%
100-386	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,18	20%
100-387	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,18	20%
100-388	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,20	20%
100-389	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,20	20%
100-390	В	0,53	0,01	0,64	0,01	0,23	20%
100-391	Н	0,53	0,01	0,64	0,01	0,23	20%


11.10. Дуги ортодонтические стальные D-LX Shape Stainless Steel Wire.

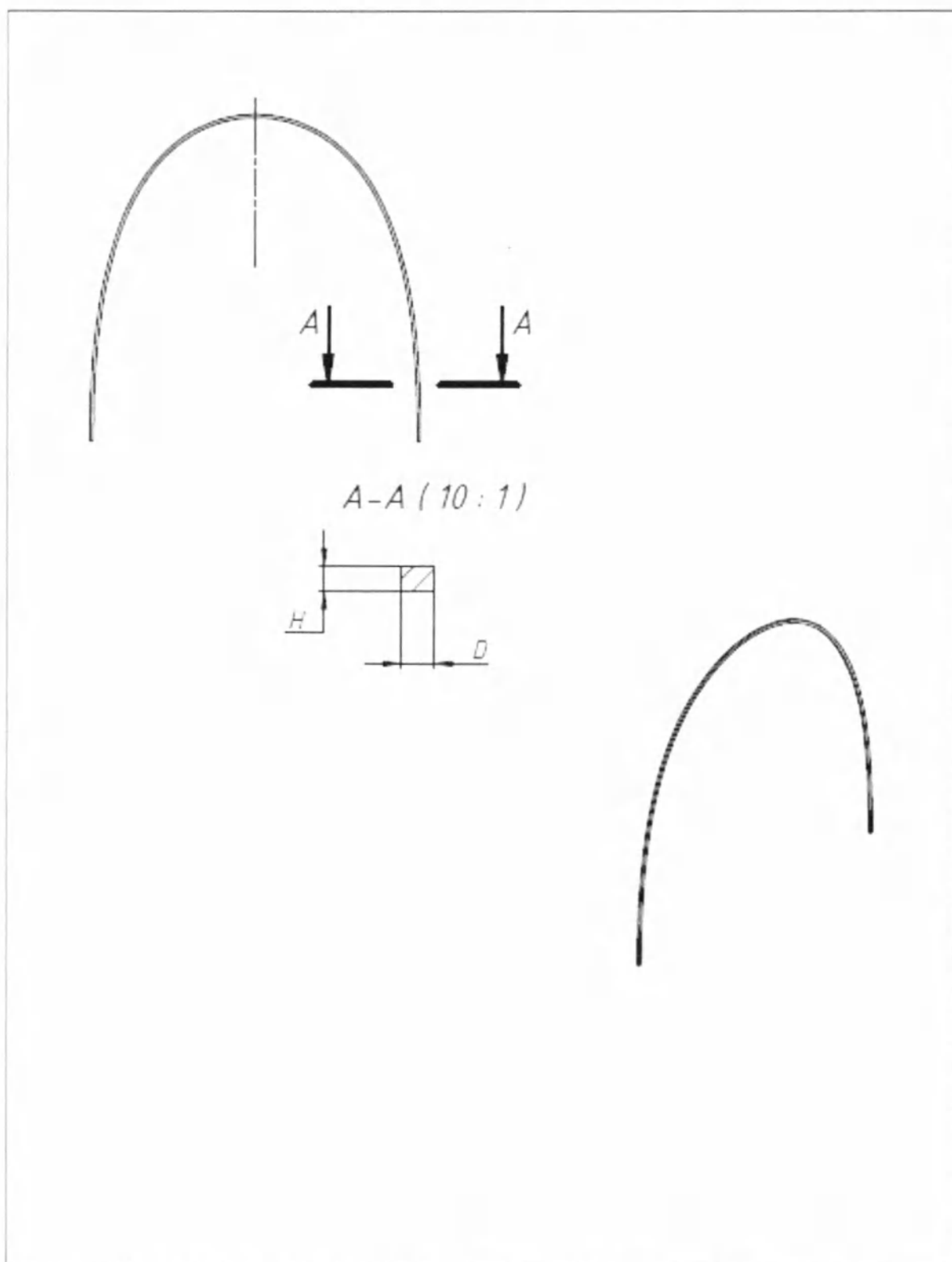

Дуги ортодонтические стальные D-LX Shape Stainless Steel Wire


Номер по каталогу	Стандартная (С)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
103-115	С	0,41	0,01	0,64	0,01	0,32	20%
103-116	С	0,43	0,01	0,64	0,01	0,35	20%
103-127	С	0,48	0,01	0,64	0,01	0,37	20%

11.11. Дуги ортодонтические стальные M-Series Stainless Steel D-LX.

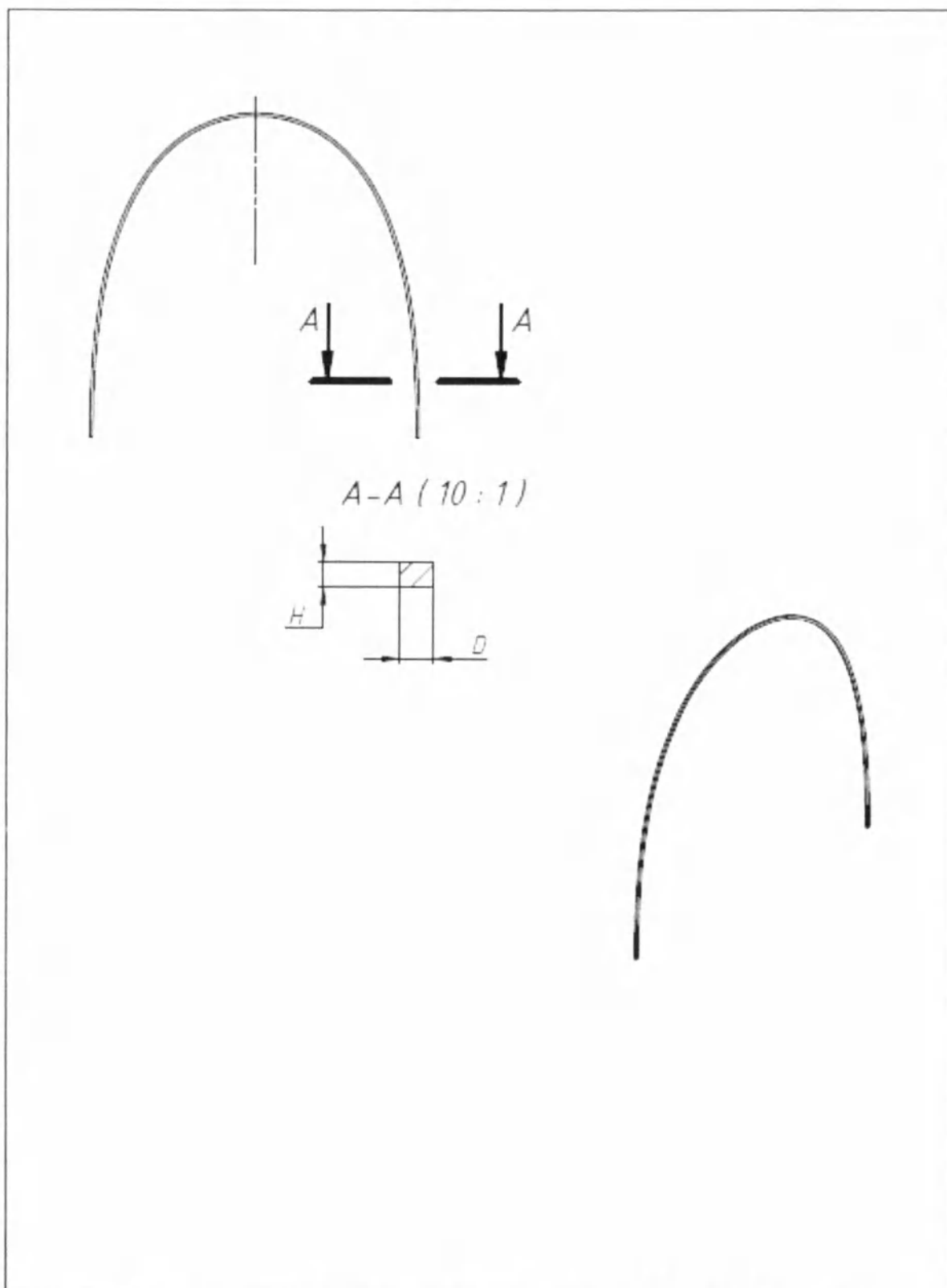

Дуги ортодонтические стальные M-Series SS D-LX SinglePack							
Номер по каталогу	Стандартная (C)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
103-MFA	C	0,48	0,01	0,64	0,01	0,37	20%
103-M3S	C	0,48	0,01	0,64	0,01	0,37	20%


11.12. Дуги ортодонтические стальные CO-AXIAL.

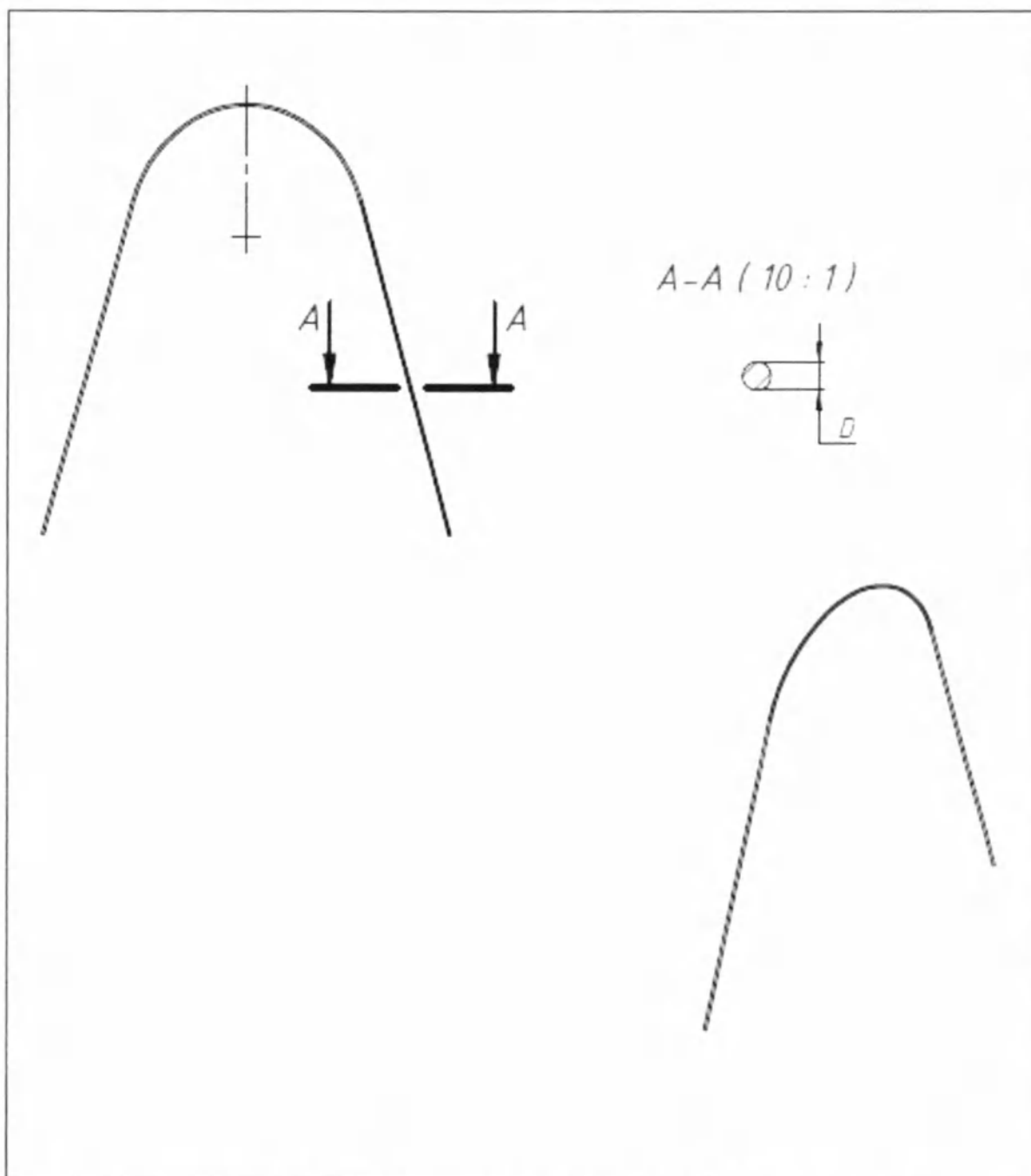

Дуги ортодонтические стальные CO-AXIAL

Номер по каталогу	Верхняя(В)/Нижняя(Н) Стандартная(С)	Размеры (мм)		Масса (г)	
		Диаметр (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-251	С	0,38	0,01	0,10	20%
100-252	С	0,44	0,01	0,14	20%
100-351	В	0,38	0,01	0,10	20%
100-352	Н	0,38	0,01	0,10	20%
100-353	В	0,44	0,01	0,14	20%
100-354	Н	0,44	0,01	0,14	20%
100-355	В	0,50	0,01	0,16	20%
100-356	Н	0,50	0,01	0,16	20%


11.13. Дуги ортодонтические стальные 14" STR CO-AXIAL.

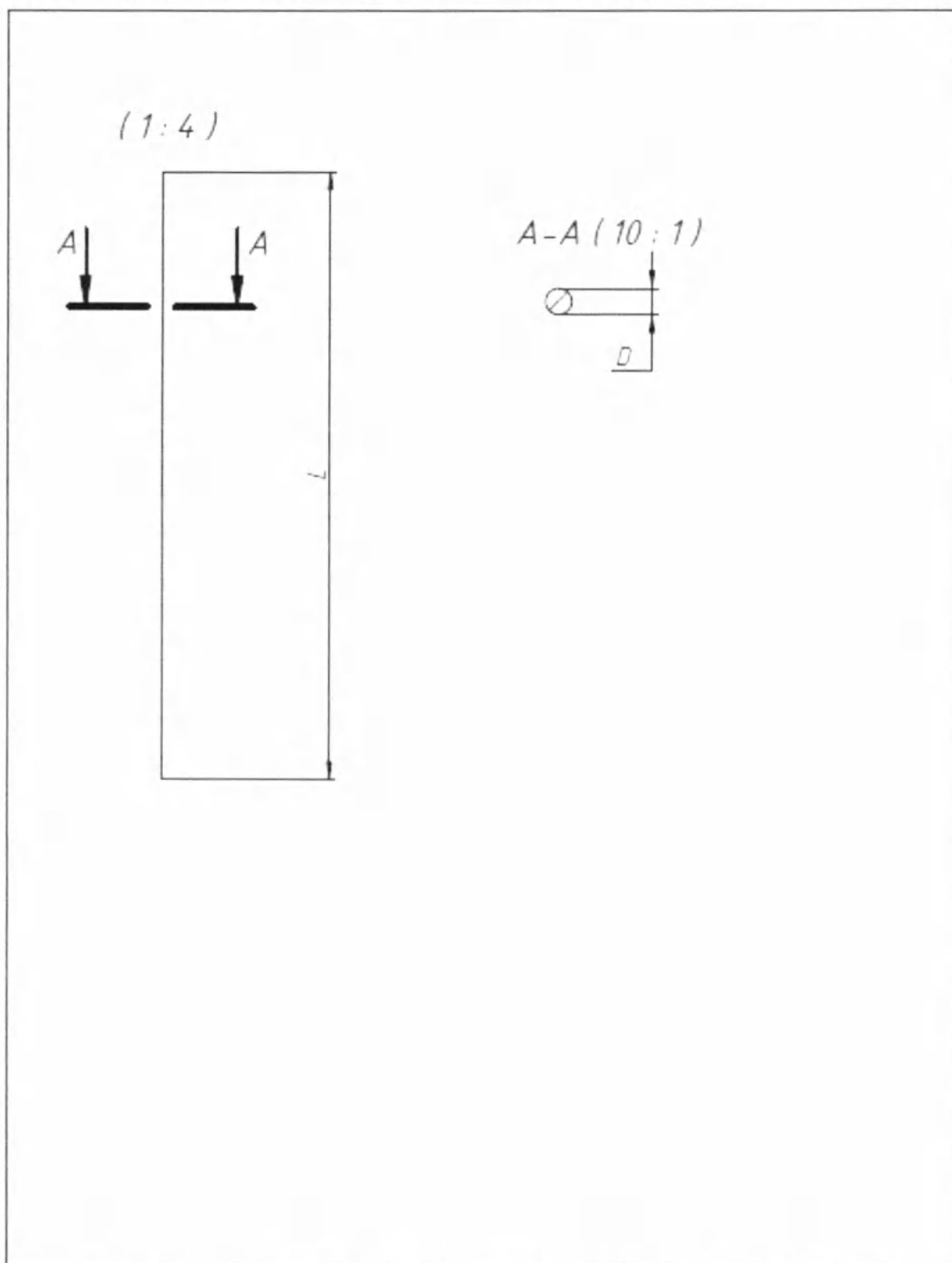

Дуга ортодонтическая стальная 14" STR CO-AXIAL

Номер по каталогу	Стандартная (С)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Длина (L)	±Доп.	Диаметр (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-258	С	355,6	0,01	0,38	0,01	0,14	20%
100-259	С	355,6	0,01	0,43	0,01	0,16	20%
100-260	С	355,6	0,01	0,48	0,01	0,19	20%


11.14. Дуги ортодонтические стальные TWIST.

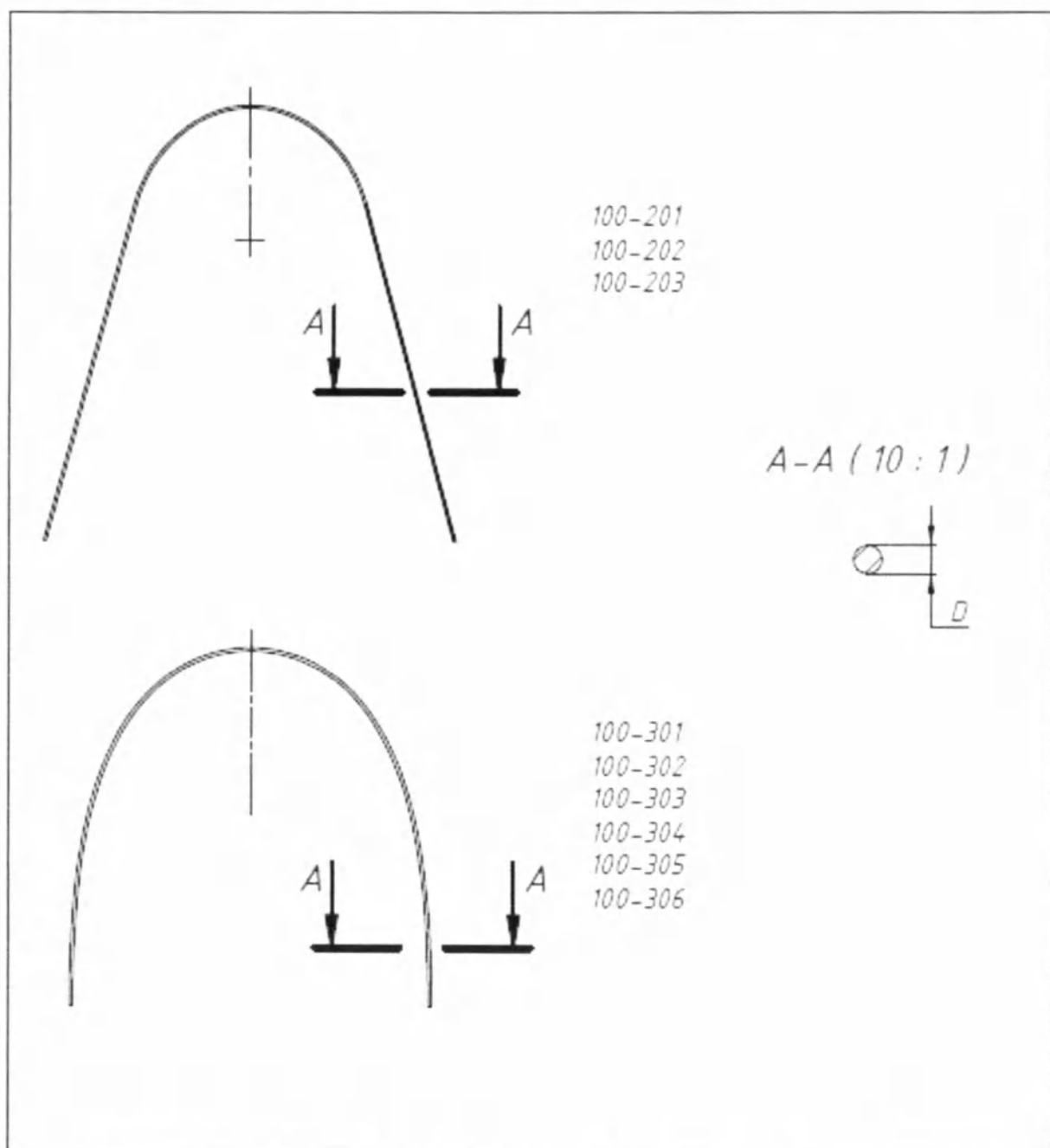

Дуги ортодонтические стальные TWIST

Номер по каталогу	Верхняя(В)/Нижняя(Н) Стандартная(С)	Размеры (мм)		Масса (г)	
		Диаметр (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-201	С	0,38	0,01	0,11	20%
100-202	С	0,44	0,01	0,12	20%
100-203	С	0,50	0,01	0,15	20%
100-301	В	0,38	0,01	0,10	20%
100-302	Н	0,38	0,01	0,07	20%
100-303	В	0,44	0,01	0,13	20%
100-304	Н	0,44	0,01	0,09	20%
100-305	В	0,50	0,01	0,16	20%
100-306	Н	0,50	0,01	0,16	20%


11.15. Дуги ортодонтические стальные BRT WIRE.

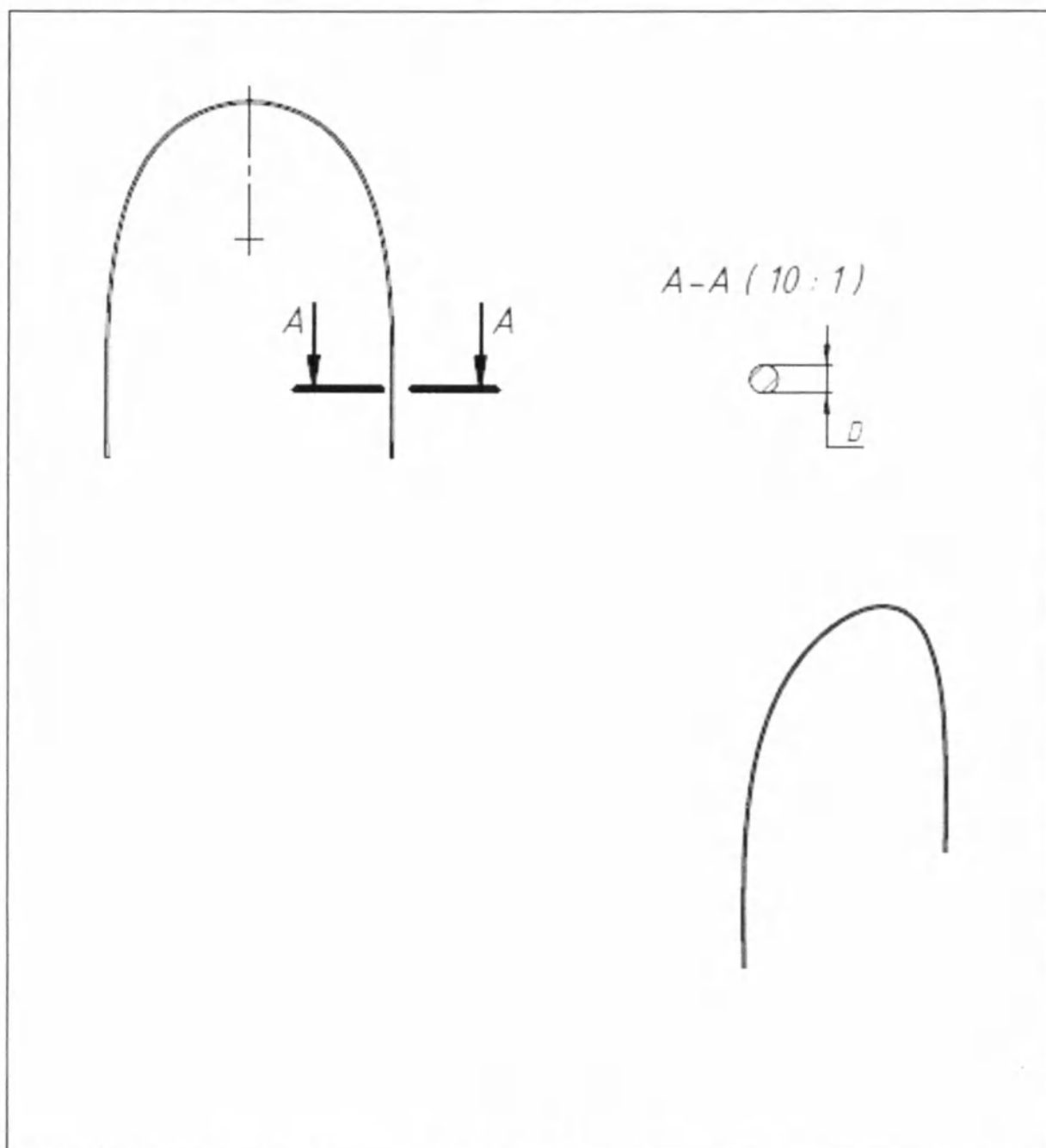

Дуги ортодонтические стальные BRT WIRE

Номер по каталогу	Нижняя (Н) Верхняя (В)	Размеры (мм)		Масса (г)	
		Диаметр (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-141	В	0,41	0,01	0,20	20%
100-142	В	0,46	0,01	0,23	20%
100-143	В	0,51	0,01	0,25	20%
100-150	Н	0,36	0,01	0,18	20%
100-151	Н	0,41	0,01	0,20	20%
100-152	Н	0,46	0,01	0,23	20%
100-153	Н	0,51	0,01	0,25	20%
100-160	В	0,30	0,01	0,27	20%
100-161	Н	0,30	0,01	0,27	20%


11.16. Дуги ортодонтические стальные BRIGHT WIRE.

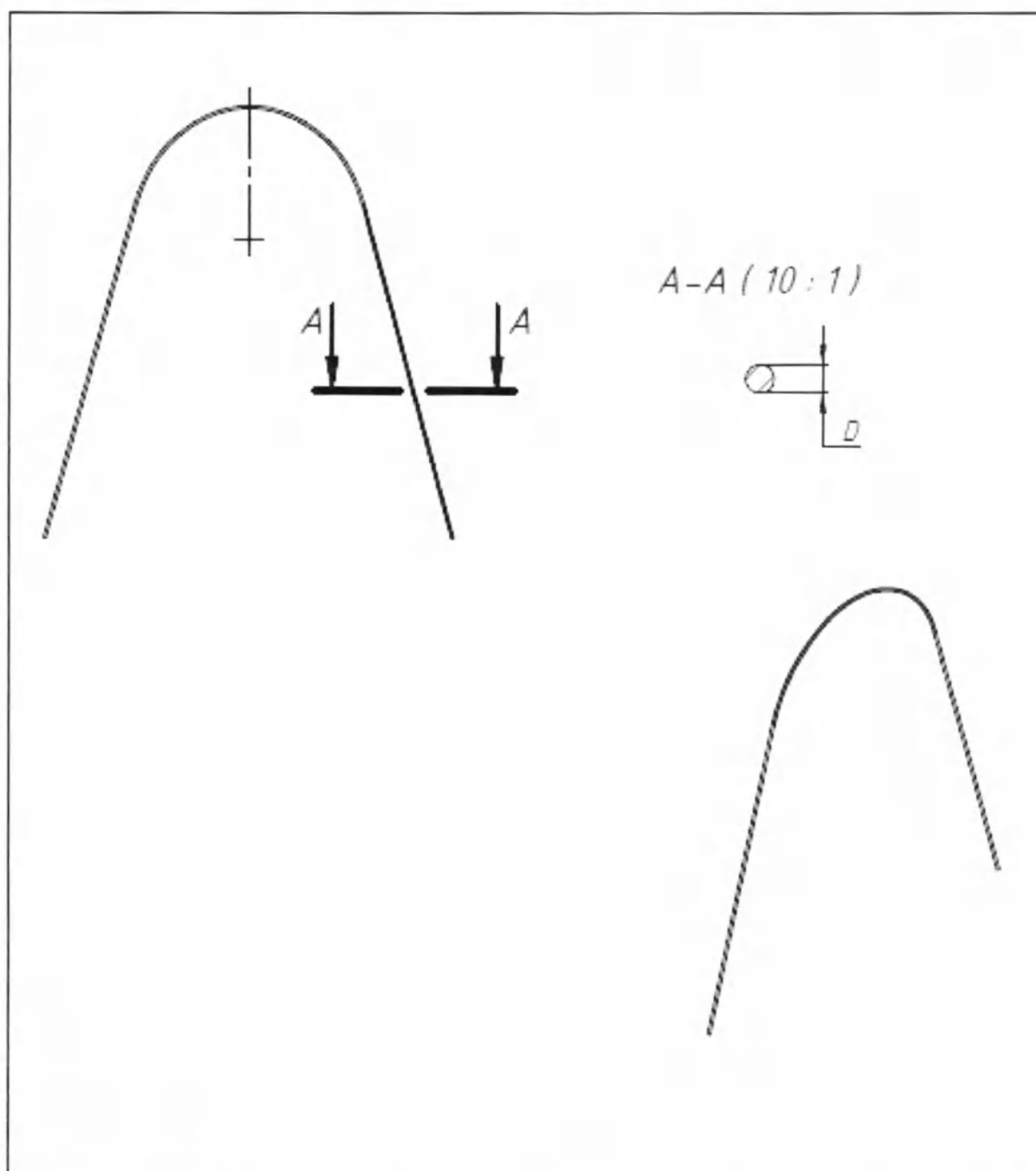

Дуги ортодонтические стальные BRIGHT WIRE

Номер по каталогу	Нижняя (Н) Верхняя (В)	Размеры (мм)		Масса (г)	
		Диаметр (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-544	В	0,36	0,01	0,15	20%
100-545	Н	0,36	0,01	0,15	20%
100-546	В	0,41	0,01	0,17	20%
100-547	Н	0,41	0,01	0,17	20%
100-548	В	0,46	0,01	0,20	20%
100-549	Н	0,46	0,01	0,20	20%
100-550	В	0,51	0,01	0,22	20%
100-551	Н	0,51	0,01	0,22	20%


11.17. Дуги ортодонтические стальные SS OVAL ARCH FORM III.

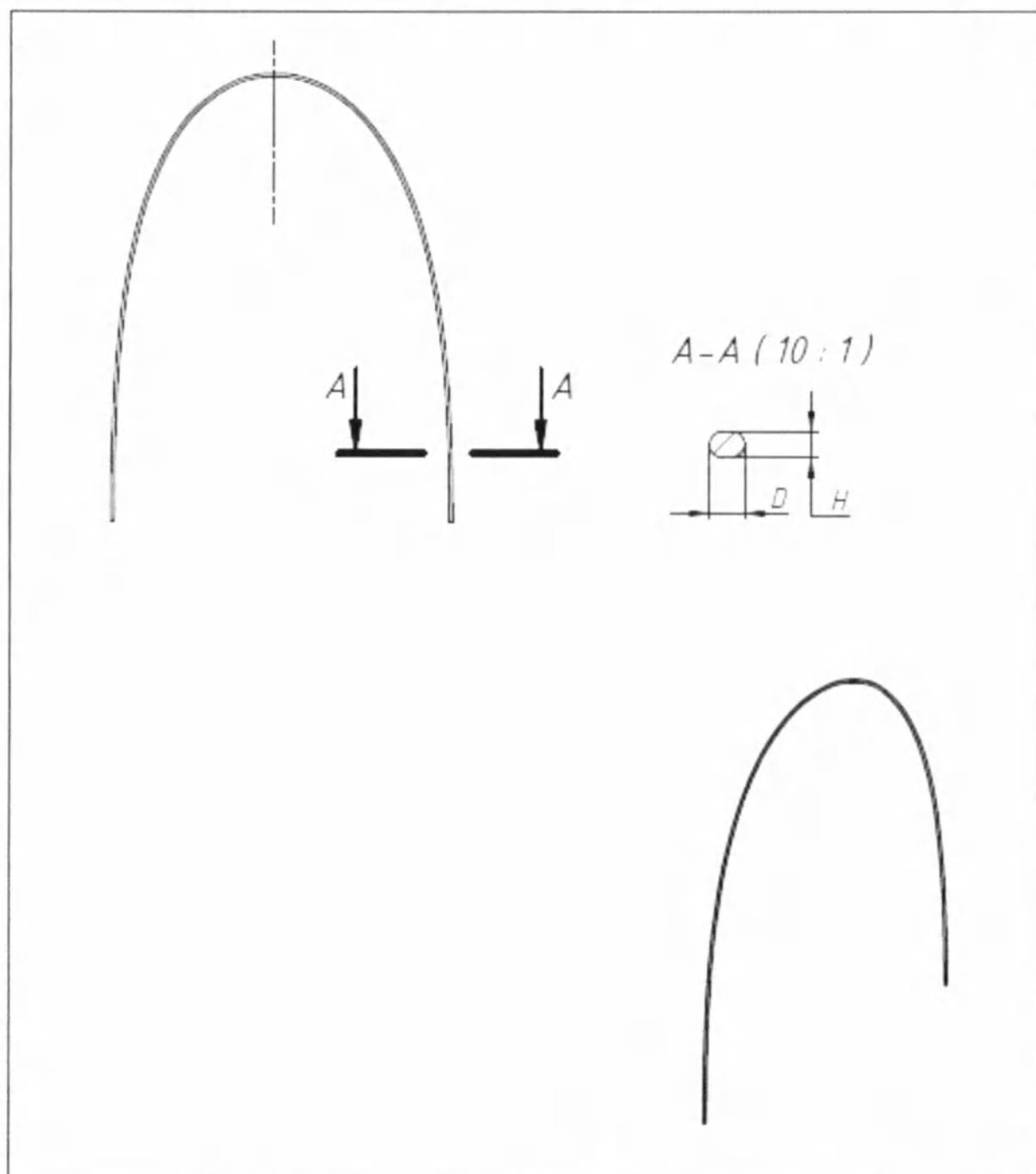

Дуги ортодонтические стальные SS OVAL ARCH FORM III

Номер по каталогу	Размеры (мм)				Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Масса (г)	
	Глубина (D)	±Доп.	Высота (H)	±Доп.		Масса	±Доп.
101-402	0,36	0,01	0,36	0,01	В	0,17	20%
101-403	0,36	0,01	0,36	0,01	Н	0,17	20%
101-404	0,41	0,01	0,41	0,01	В	0,20	20%
101-405	0,41	0,01	0,41	0,01	Н	0,20	20%
101-406	0,46	0,01	0,46	0,01	В	0,24	20%
101-407	0,46	0,01	0,46	0,01	Н	0,24	20%
101-408	0,51	0,01	0,51	0,01	В	0,27	20%
101-409	0,51	0,01	0,51	0,01	Н	0,27	20%


11.18. Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM INTRUSION ARCHWIRE.

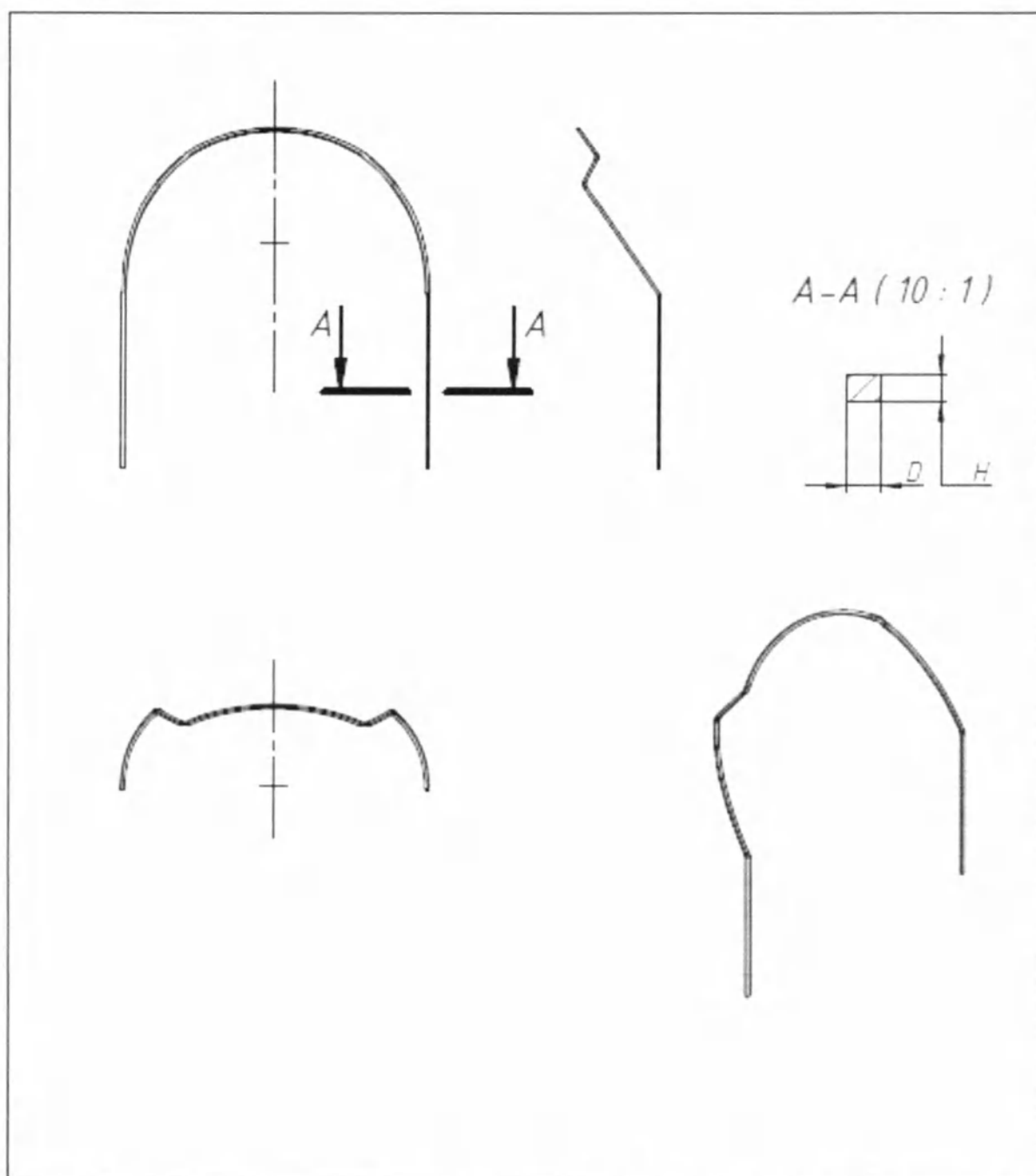

Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM INTRUSION ARCHWIRE


Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-980	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,24	20%
100-981	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,24	20%
100-982	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,24	20%
100-983	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,24	20%
100-984	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,26	20%
100-985	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,26	20%
100-986	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,26	20%
100-987	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,26	20%

11.19. Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM UTILITY ARCHWIRE.

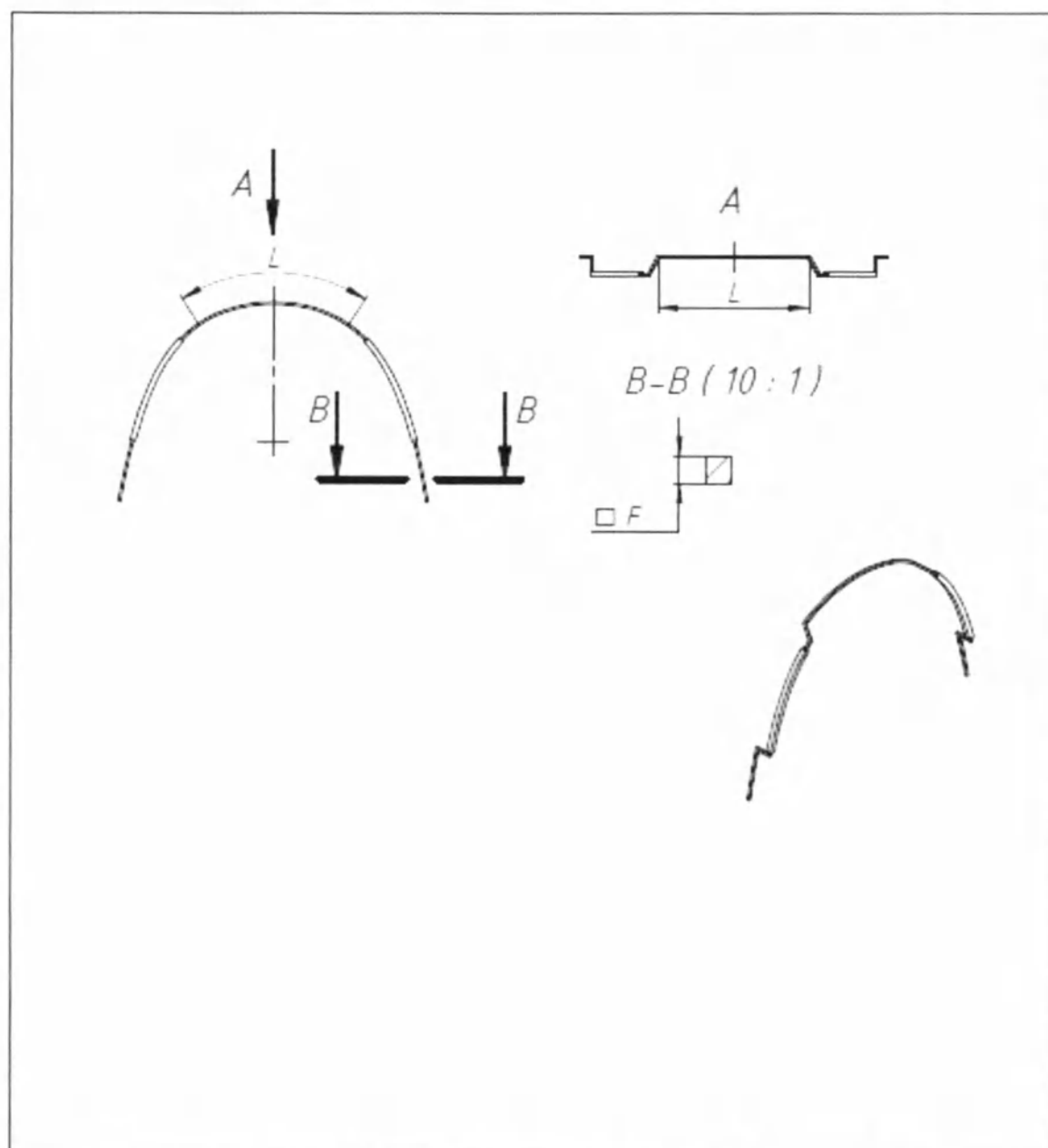


Дуги ортодонтические никель-титановая NITANIUM UTILITY ARCH						
Номер по каталогу	Нижняя (Н) Верхняя (В)	Размеры (мм)			Масса (г)	
		Грань (F)	±Доп.	Длина дуги (L)	Масса	±Доп.
100-273	Н	0,46	0,01	28	0,29	20%
100-274	В	0,46	0,01	34	0,29	20%
100-275	В	0,46	0,01	38	0,29	20%
100-275L	В	0,46	0,01	42	0,29	20%
100-276	Н	0,41	0,01	28	0,25	20%
100-277	В	0,41	0,01	34	0,25	20%
100-278	В	0,41	0,01	38	0,25	20%
100-279	Н	0,41	0,01	24	0,25	20%
100-280	В	0,41	0,01	42	0,25	20%

11.20. Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM BIO KINETIX UTILITY ARCHWIRE.

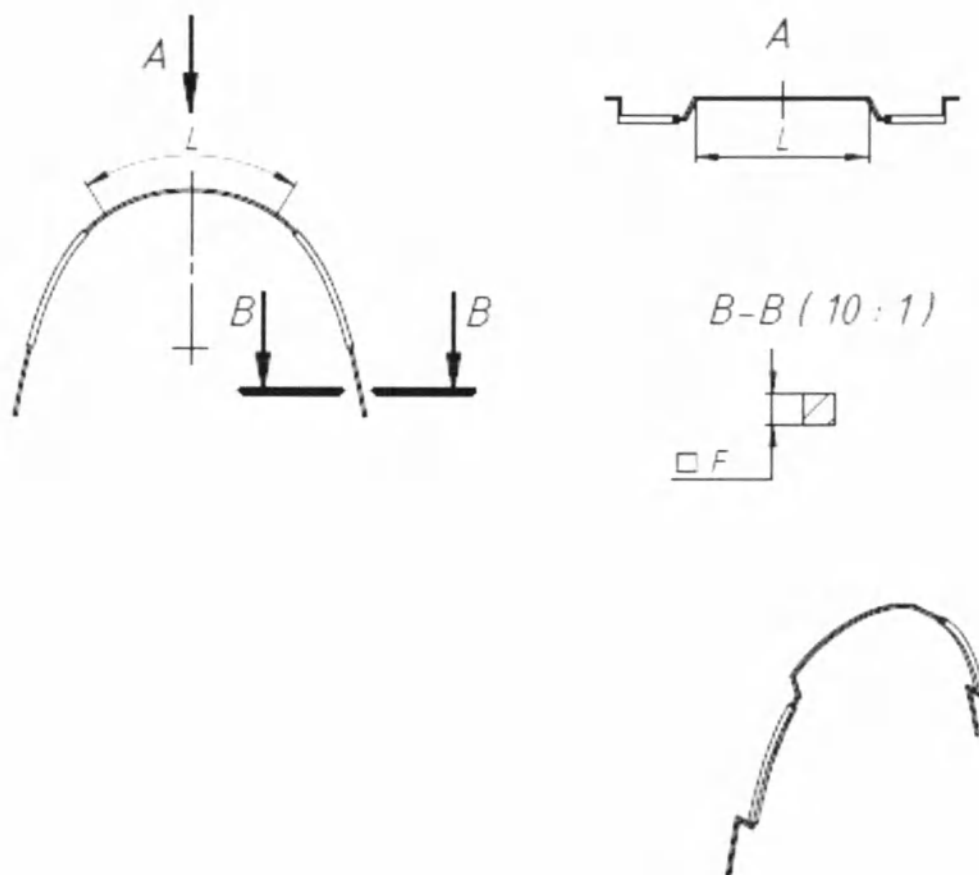


Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM BIO KINETIX UTILITY ARCHWIRE						
Номер по каталогу	Верхняя (В) / Нижняя (Н)	Размеры (мм)			Масса (г)	
		Грань (F)	±Доп.	Длина дуги (L)	Масса	±Доп.
100-283	В	0,41	0,01	28	0,28	20%
100-284	В	0,41	0,01	34	0,28	20%
100-285	В	0,41	0,01	38	0,28	20%

11.21. Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM TORQUED ARCHWIRE.

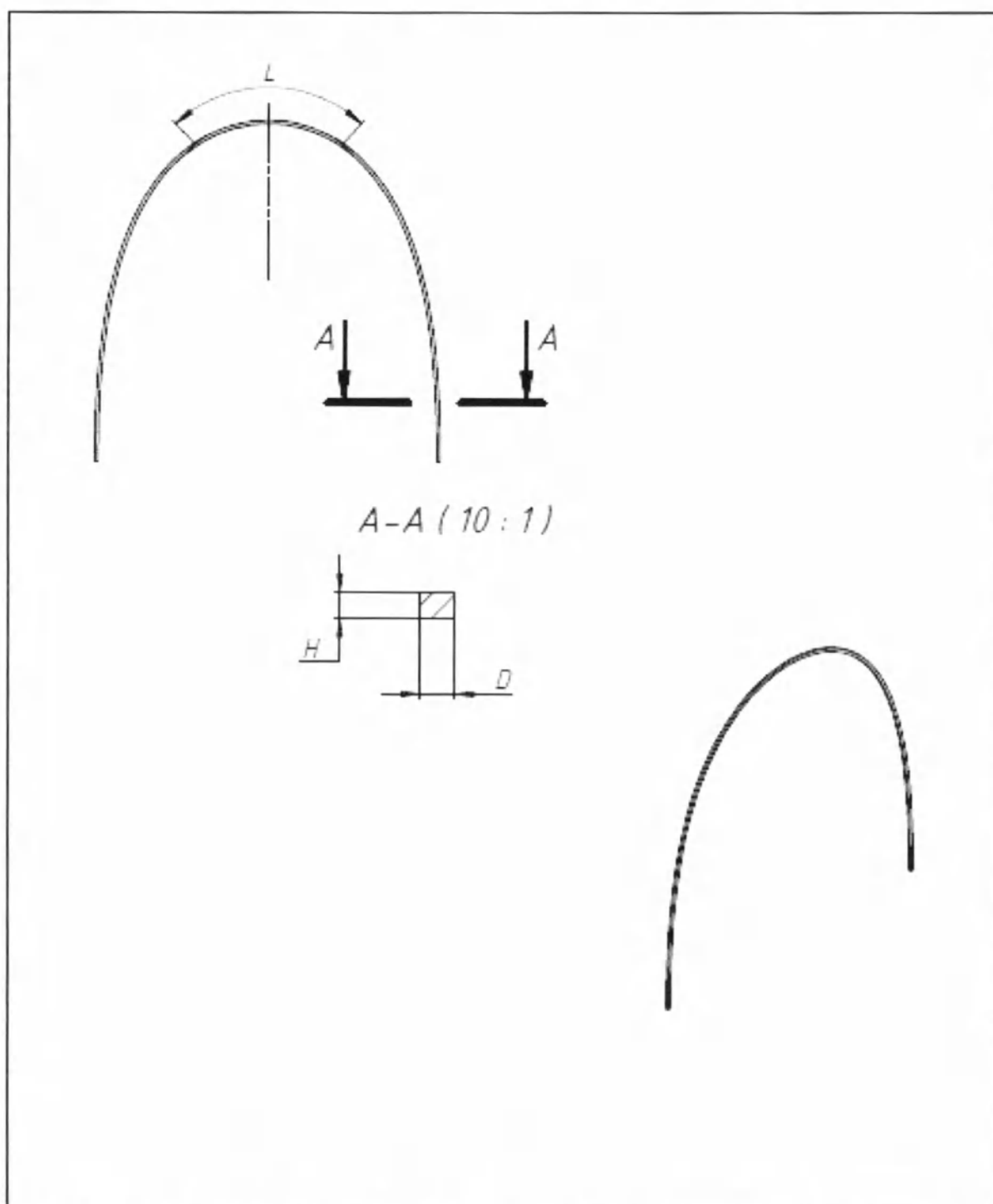


Дуги ортодонтическая никель-титановая NITANIUM TORQUED ARCHWIRE								
Номер по каталогу	Стандартная (С)	Длина (L) мм	Размеры (мм)				Масса (г)	
			Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
101-835	С	28	0,43	0,01	0,64	0,01	0,24	20%
101-836	С	34	0,43	0,01	0,64	0,01	0,24	20%
101-837	С	38	0,43	0,01	0,64	0,01	0,24	20%
101-841	С	28	0,48	0,01	0,64	0,01	0,27	20%
101-842	С	34	0,48	0,01	0,64	0,01	0,27	20%
101-843	С	38	0,48	0,01	0,64	0,01	0,27	20%

11.22. Дуги ортодонтические никель-титановые RCS Super Elastic Nitanium Wire.

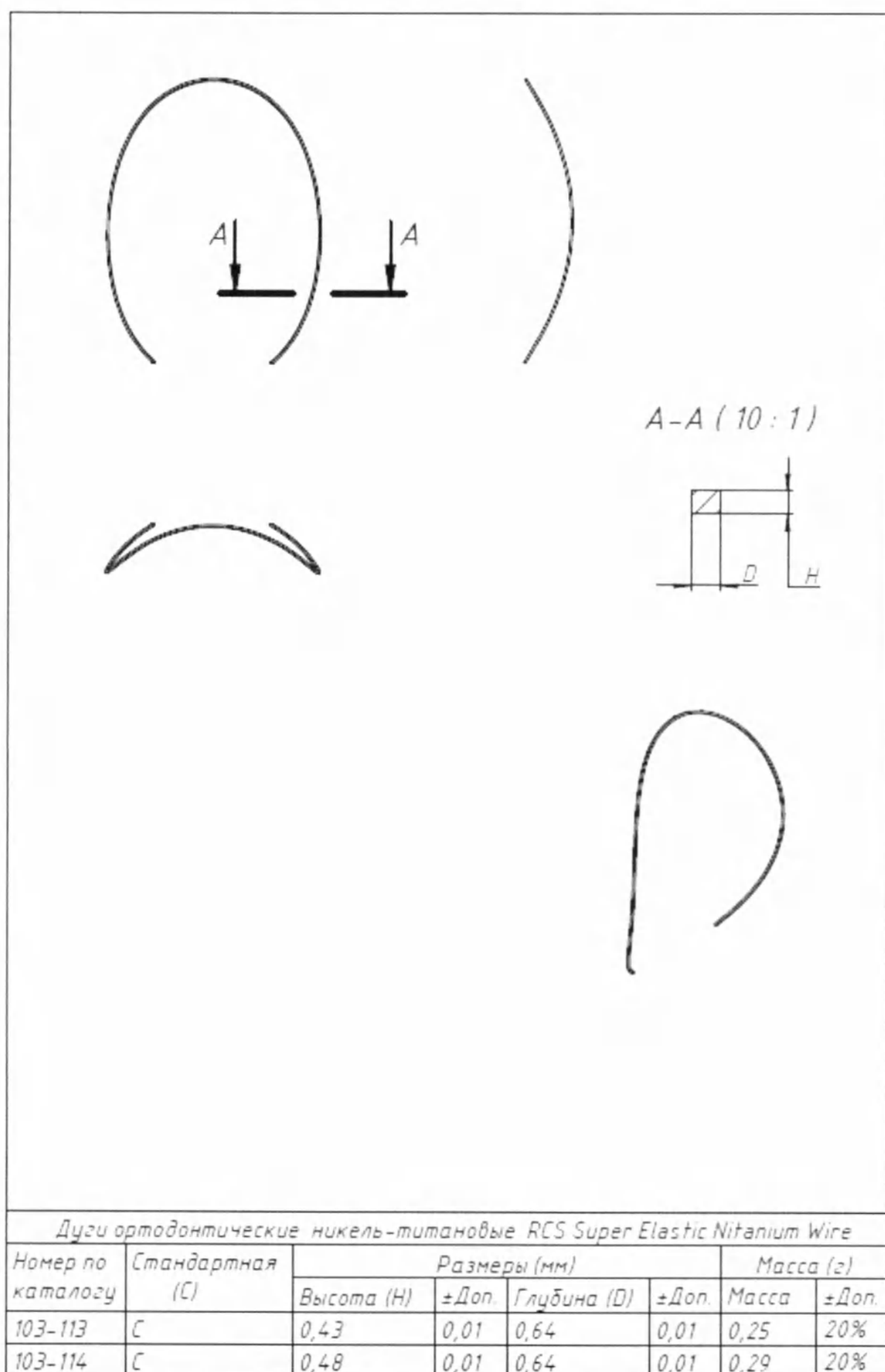


11.23. Дуги ортодонтические никель-титановые Pro Form Nitanium w/20° Torque Wire.

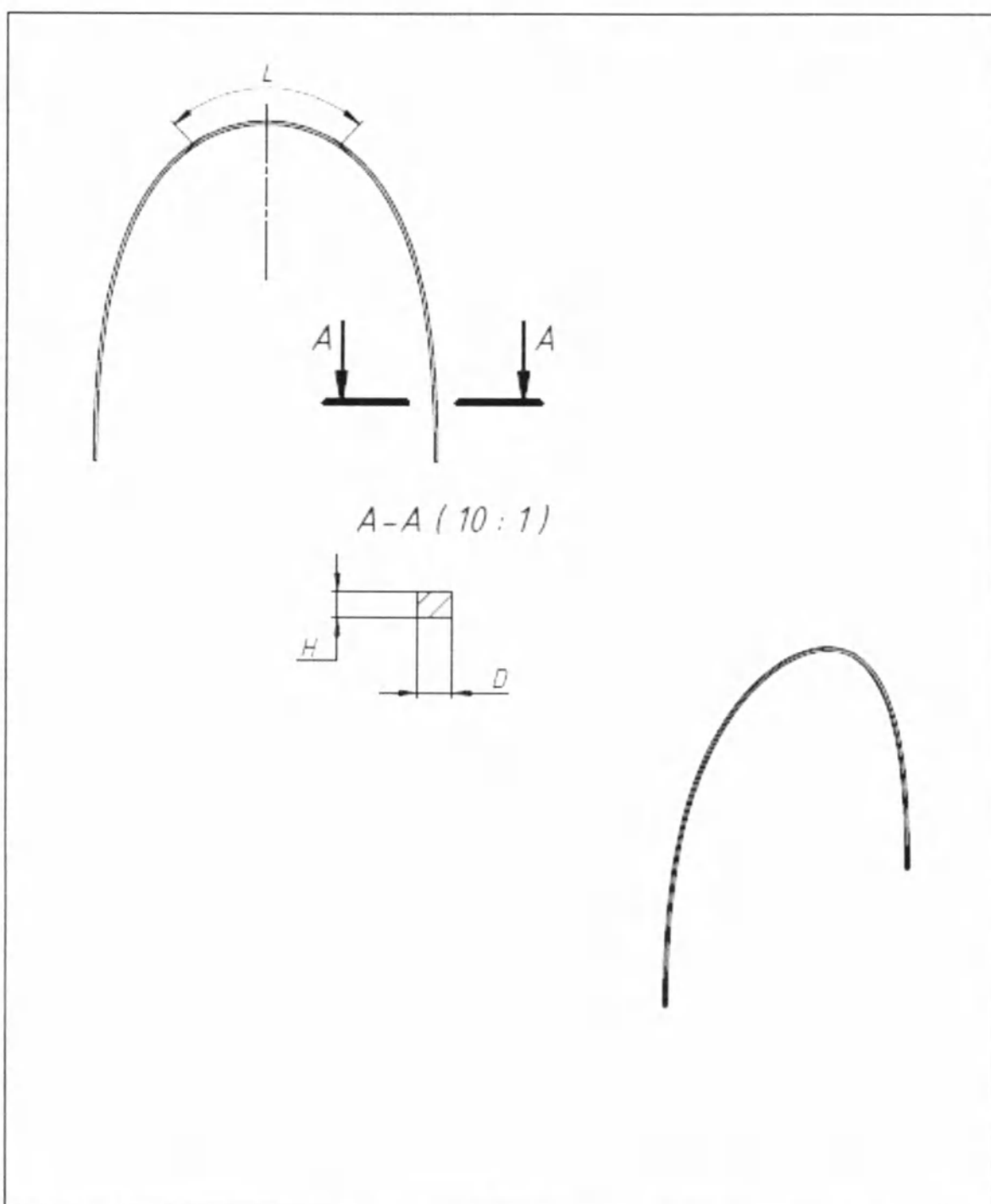

Дуги ортодонтические никель-титановые Pro Form Nitanium w/20° Torque Wire							
Номер по каталогу	Размеры (мм)					Масса (г)	
	Глубина (D)	±Доп.	Высота (H)	±Доп.	Длина дуги (L)	Масса	±Доп.
103-107	0,64	0,01	0,41	0,01	34	0,24	20%
103-108	0,64	0,01	0,41	0,01	38	0,24	20%
103-109	0,64	0,01	0,43	0,01	34	0,27	20%
103-110	0,64	0,01	0,43	0,01	38	0,27	20%
103-111	0,64	0,01	0,48	0,01	34	0,32	20%
103-112	0,64	0,01	0,48	0,01	38	0,32	20%

11.24. Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM.

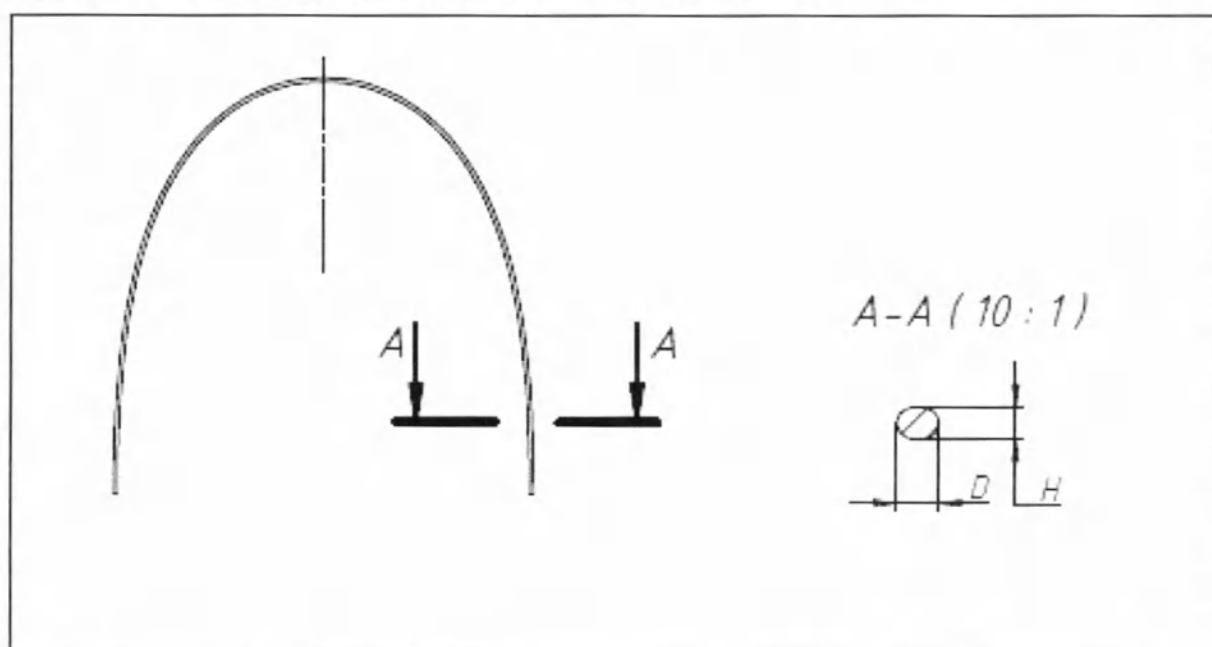


Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-650	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,10	20%
100-651	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,10	20%
100-652	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
100-653	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
100-654	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16	20%
100-655	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16	20%
100-656	В	0,51	0,01	0,51	0,01	0,19	20%
100-657	Н	0,51	0,01	0,51	0,01	0,19	20%
100-658	В	0,30	0,01	0,30	0,01	0,07	20%
100-659	Н	0,30	0,01	0,30	0,01	0,07	20%
100-660	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
100-661	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
100-662	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,15	20%
100-663	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,15	20%
100-664	В	0,43	0,01	0,56	0,01	0,27	20%
100-665	Н	0,43	0,01	0,56	0,01	0,26	20%
100-666	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,16	20%
100-667	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,26	20%
100-668	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
100-669	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
100-670	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16	20%
100-671	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16	20%
100-672	В	0,51	0,01	0,51	0,01	0,19	20%
100-673	Н	0,51	0,01	0,51	0,01	0,19	20%


Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Высота (Н)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Размеры (мм)	Масса (г)
100-582	В	0,41	0,01	0,41	0,01		20%
100-583	Н	0,41	0,01	0,41	0,01		20%
100-584	В	0,46	0,01	0,46	0,01		20%
100-585	Н	0,46	0,01	0,46	0,01		20%
100-590	В	0,41	0,01	0,56	0,01		20%
100-591	Н	0,41	0,01	0,56	0,01		20%
100-592	В	0,43	0,01	0,56	0,01		20%
100-593	Н	0,43	0,01	0,56	0,01		20%
100-594	В	0,46	0,01	0,56	0,01		20%
100-595	Н	0,46	0,01	0,56	0,01		20%
100-596	В	0,48	0,01	0,56	0,01		20%
100-597	Н	0,48	0,01	0,56	0,01		20%
100-599	В	0,36	0,01	0,36	0,01		20%
100-600	Н	0,36	0,01	0,36	0,01		20%
100-601	В	0,41	0,01	0,41	0,01		20%
100-602	Н	0,41	0,01	0,41	0,01		20%
100-603	В	0,46	0,01	0,46	0,01		20%
100-604	Н	0,46	0,01	0,46	0,01		20%
100-605	В	0,41	0,01	0,56	0,01		20%
100-606	Н	0,41	0,01	0,56	0,01		20%
100-607	В	0,43	0,01	0,64	0,01		20%
100-608	Н	0,43	0,01	0,64	0,01		20%
100-609	В	0,48	0,01	0,64	0,01		20%
100-610	Н	0,48	0,01	0,64	0,01		20%

Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM

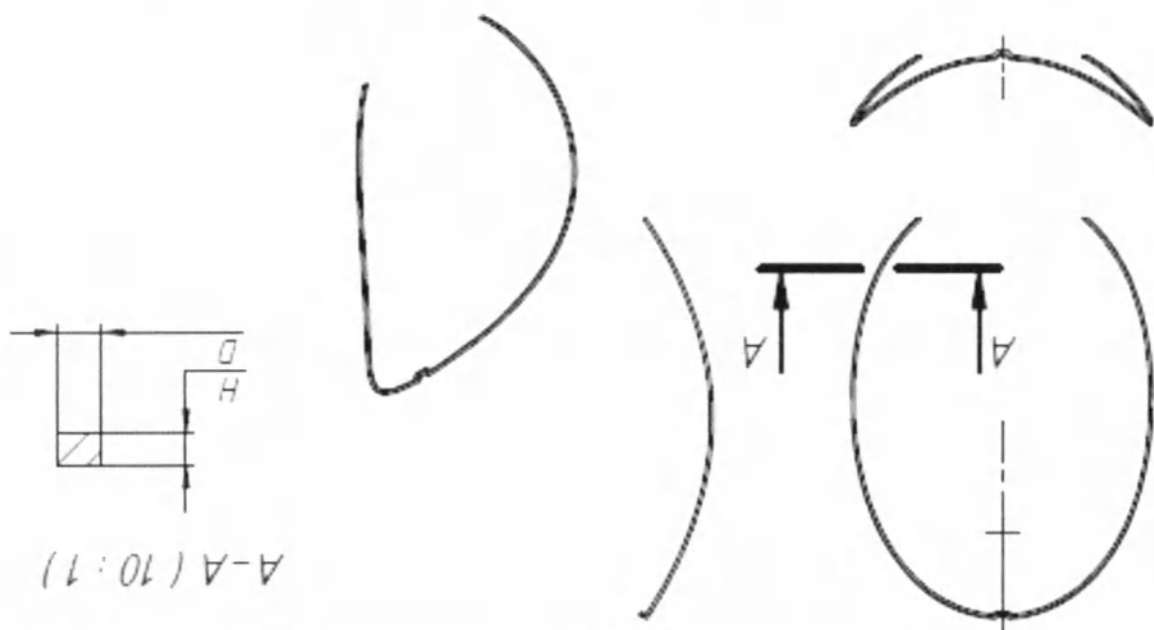


Номер по каталогу	Верхняя(В)/ нижняя(Н)	Высота (Н)	±дон.	Глубина (D)	±дон.	Размеры (мм)	Масса (г)
100-700	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,06	20%
100-701	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,06	20%
100-702	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,08	20%
100-703	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,08	20%
100-704	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,10	20%
100-705	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,10	20%
100-706	В	0,51	0,01	0,51	0,01	0,12	20%
100-707	Н	0,51	0,01	0,51	0,01	0,12	20%
100-708	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,08	20%
100-709	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,08	20%
100-710	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,21	20%
100-711	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,21	20%
100-712	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,23	20%
100-713	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,23	20%
100-714	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,25	20%
100-715	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,25	20%
100-716	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,26	20%
100-717	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,26	20%


Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM

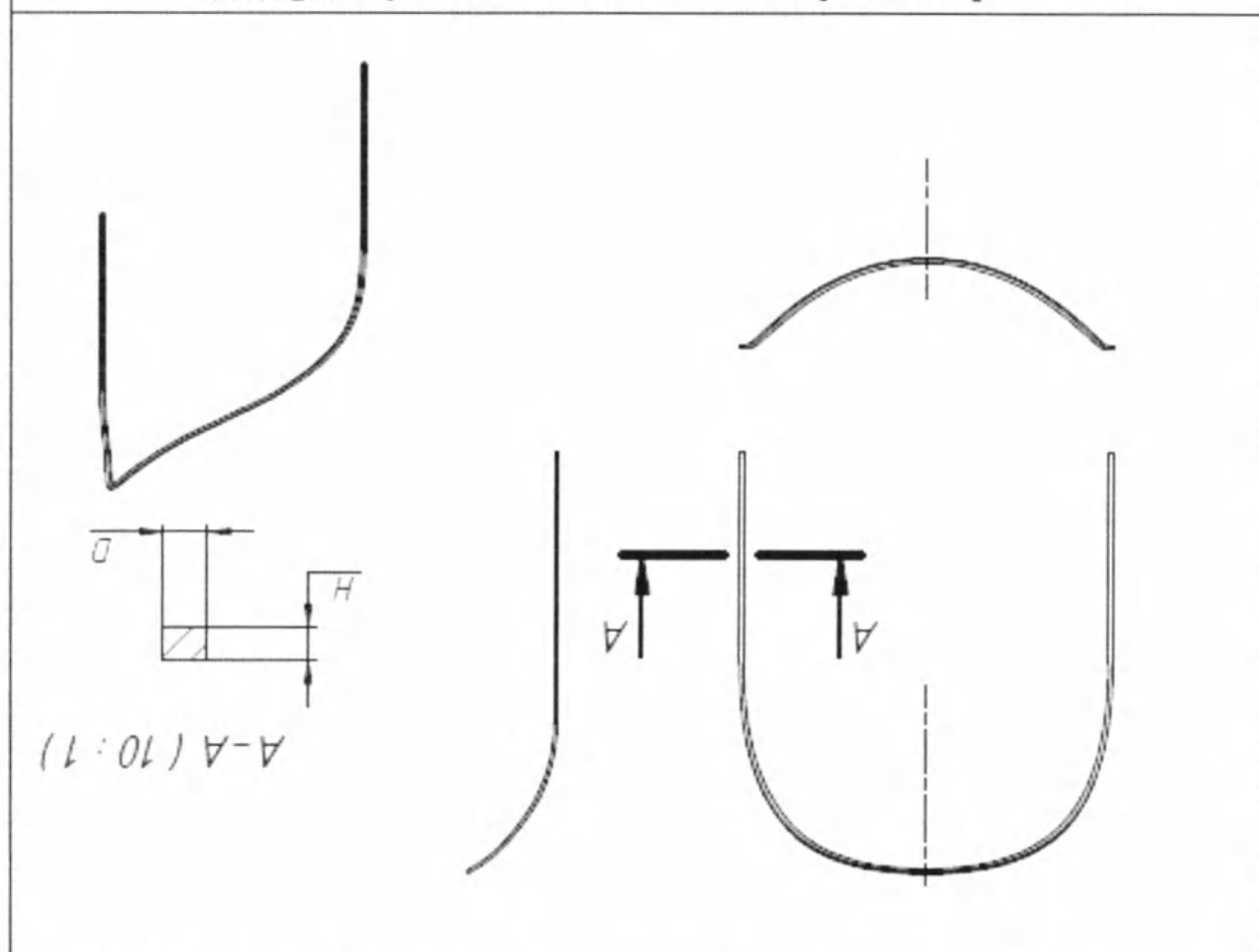

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Высота (Н)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Размеры (мм)	Масса (г)
100-800	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,07	20%
100-801	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,07	20%
100-802	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,12	20%
100-803	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,12	20%
100-804	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,15	20%
100-805	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,15	20%
100-806	В	0,51	0,01	0,51	0,01	0,19	20%
100-807	Н	0,51	0,01	0,51	0,01	0,19	20%
100-808	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
100-809	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
100-810	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,14	20%
100-811	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,14	20%
100-812	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,17	20%
100-813	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,17	20%
100-814	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,19	20%
100-815	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,19	20%
100-816	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,21	20%
100-817	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,21	20%

Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM

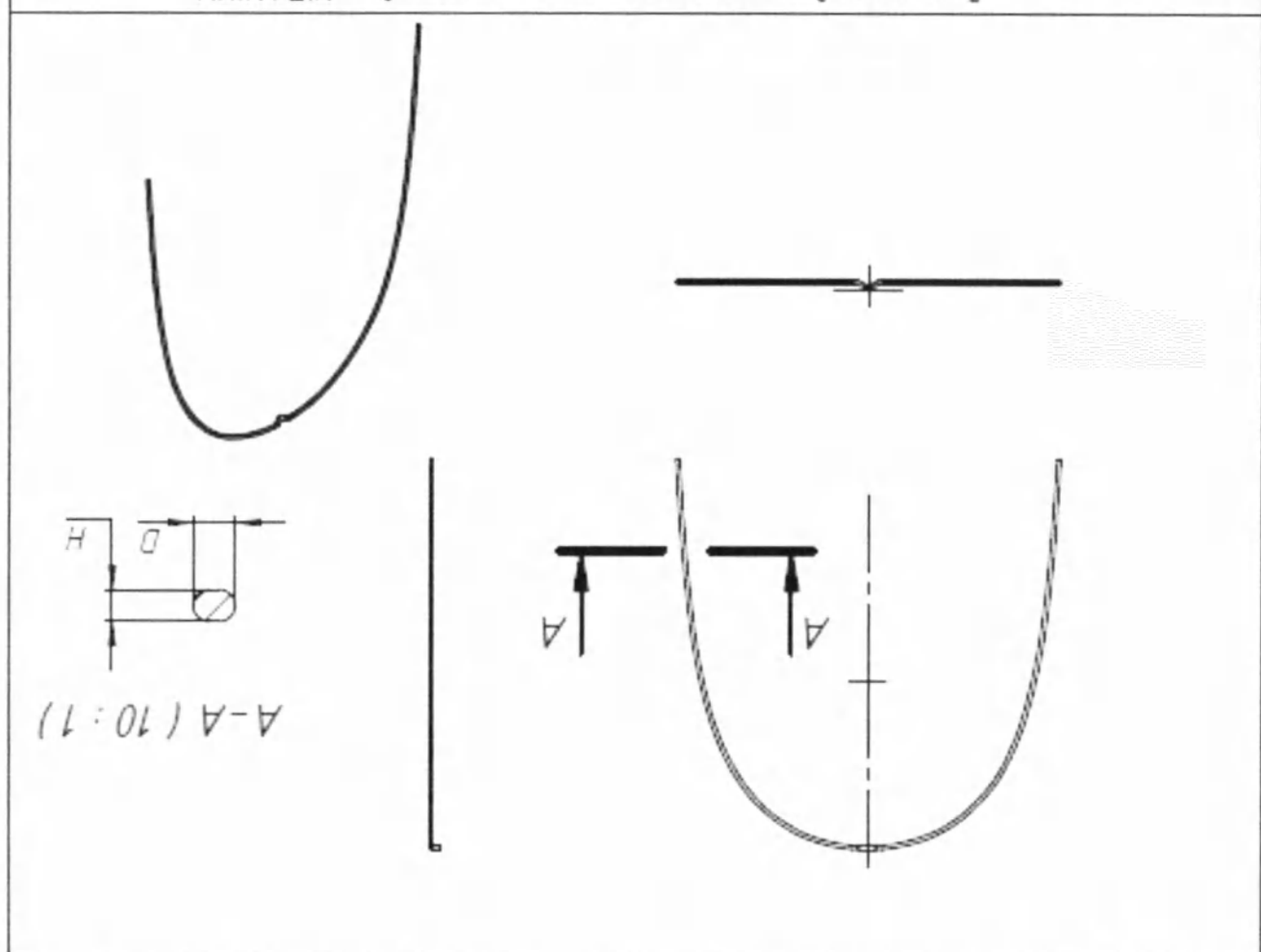


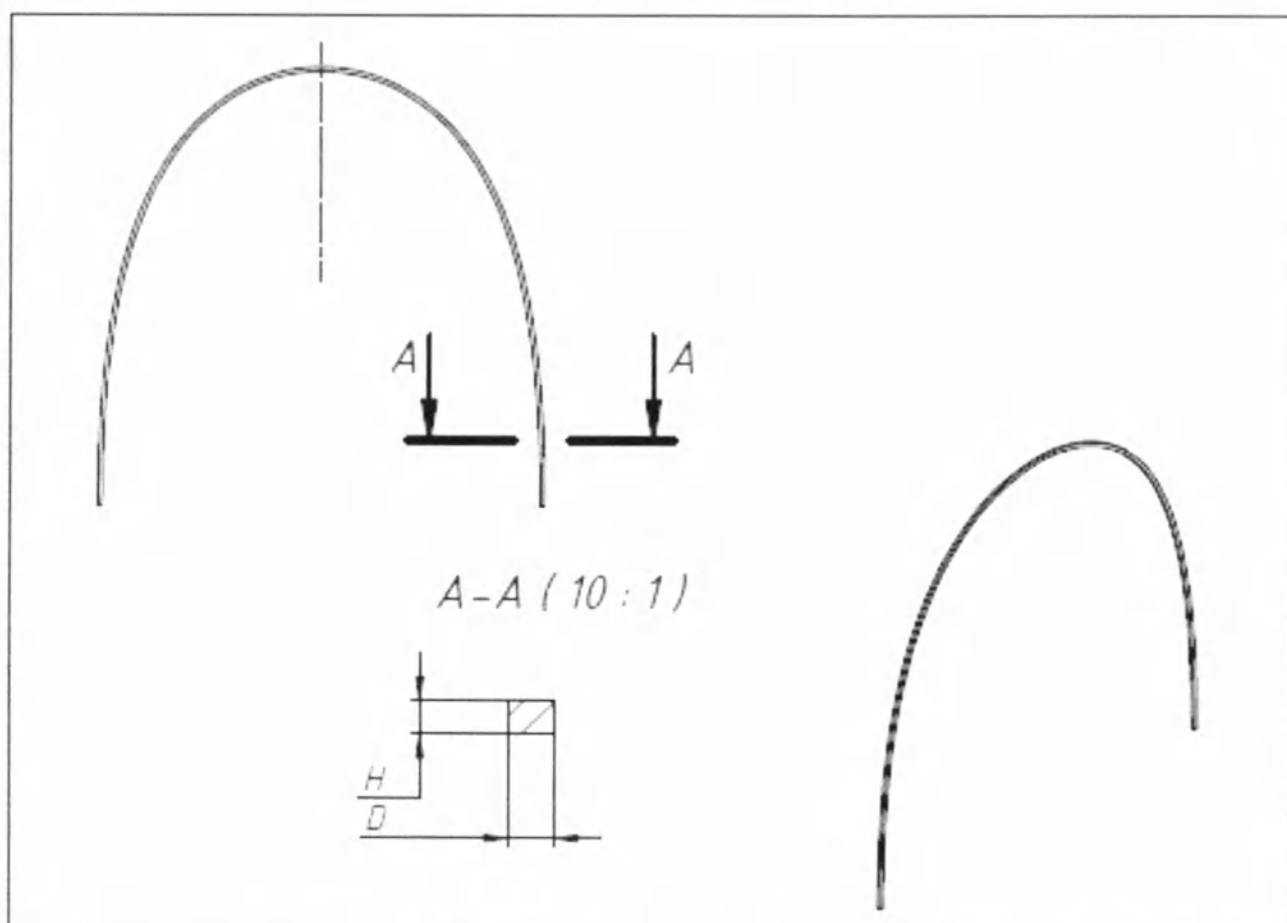

Дуги ортодонтические никель-титановые NITANIUM


Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (Н)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-878	В	0,30	0,01	0,30	0,01	0,05	20%
100-879	Н	0,30	0,01	0,30	0,01	0,05	20%
100-880	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,08	20%
100-881	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,08	20%
100-882	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,10	20%
100-883	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,10	20%
100-884	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,12	20%
100-885	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,13	20%
100-886	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,17	20%
100-887	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,18	20%
100-887A	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,20	20%
100-887B	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,20	20%
100-887D	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,21	20%
100-888	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,23	20%
100-889	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,23	20%
100-890	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,24	20%
100-891	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,24	20%
100-892	В	0,53	0,01	0,69	0,01	0,29	20%
100-893	Н	0,53	0,01	0,69	0,01	0,30	20%

11.25. Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM.

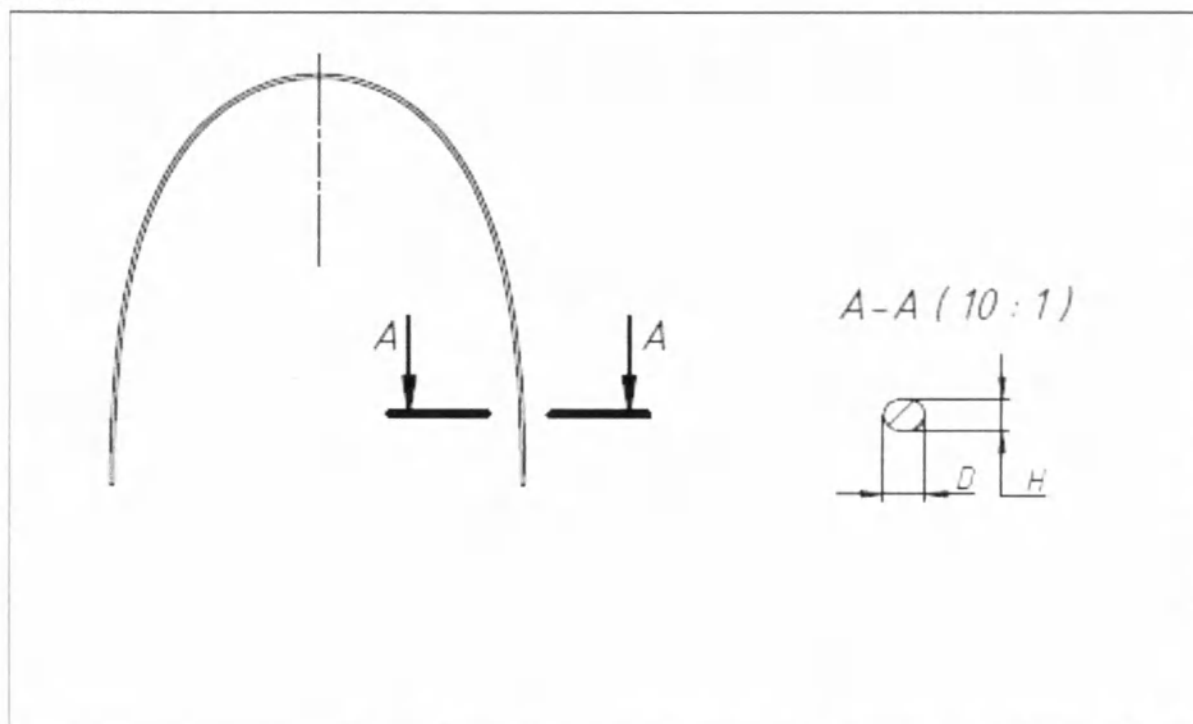


Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-850	В	0,30	0,01	0,30	0,01	0,07	20%
100-851	Н	0,30	0,01	0,30	0,01	0,07	20%
100-852	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,10	20%
100-853	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,10	20%
100-854	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
100-855	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
100-856	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,15	20%
100-857	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,15	20%
100-860	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
100-861	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
100-862	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,17	20%
100-863	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,17	20%
100-864	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,26	20%
100-865	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,26	20%
100-866	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,27	20%
100-867	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,27	20%
100-868	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,29	20%
100-869	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,29	20%
100-870	В	0,53	0,01	0,64	0,01	0,31	20%
100-871	Н	0,53	0,01	0,64	0,01	0,31	20%
100-876	В	0,53	0,01	0,69	0,01	0,33	20%
100-877	Н	0,53	0,01	0,69	0,01	0,33	20%

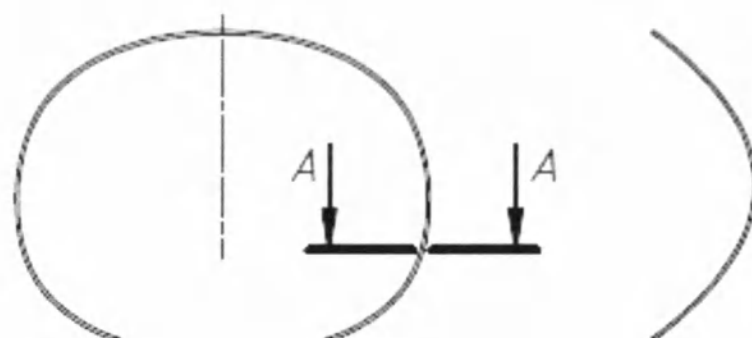


A-A (10 : 1)

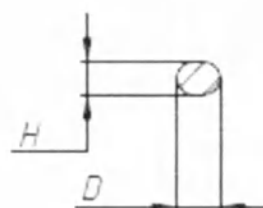


Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (Н)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-765	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,08	20%
100-766	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,08	20%

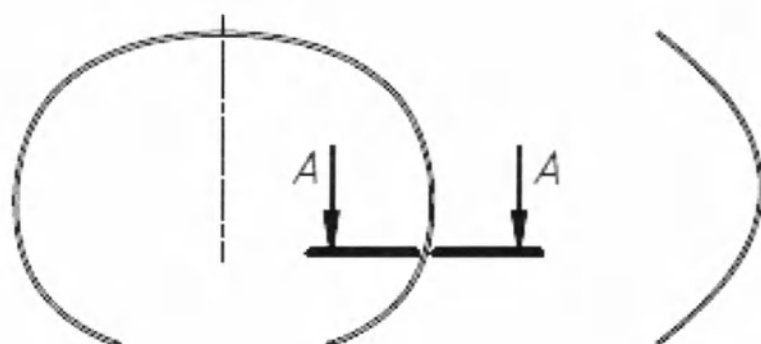


A-A (10 : 1)

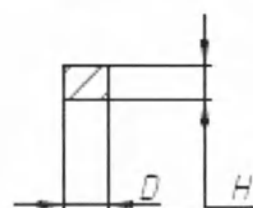

Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX THERMAL NITANIUM


Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-769	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,13	20%
100-770	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,13	20%
100-771	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,10	20%
100-772	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,10	20%

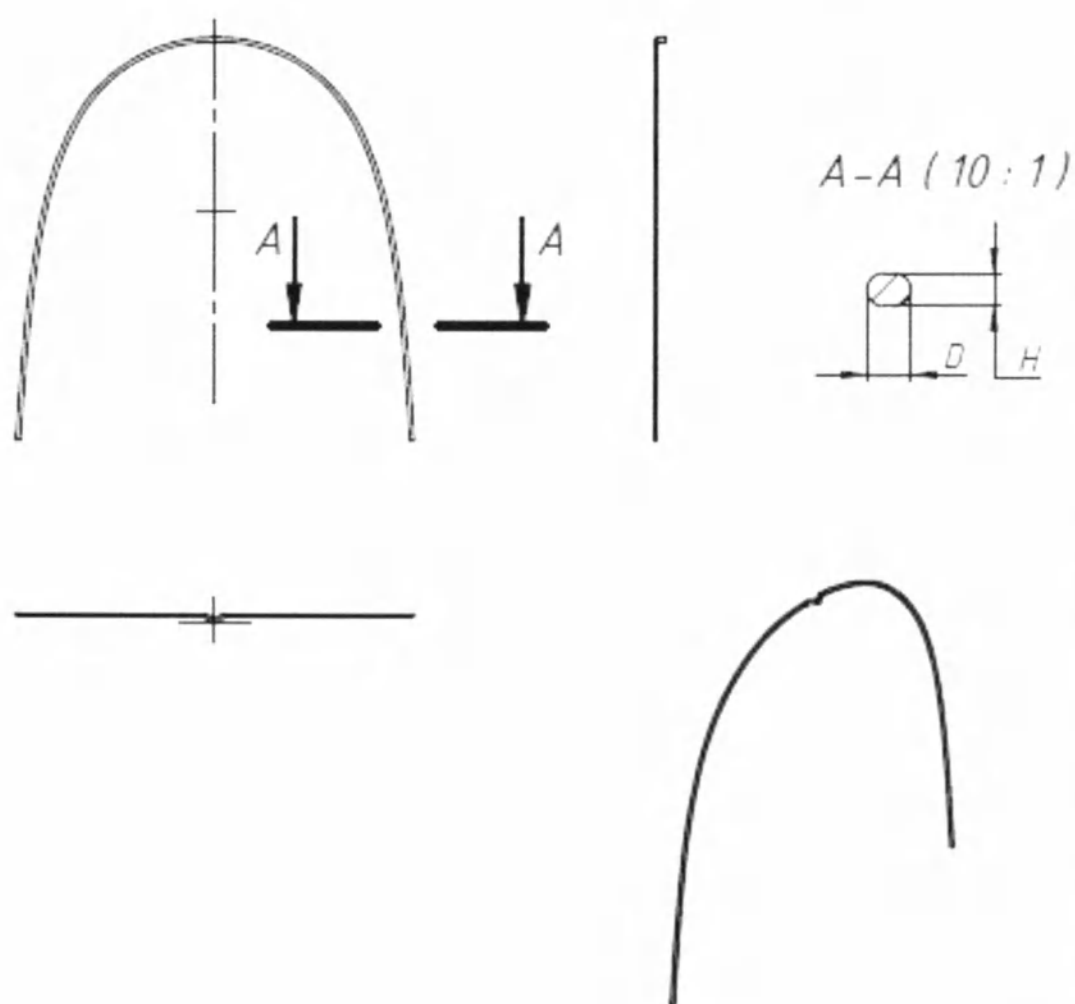

Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX THERMAL TITANIUM

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-852DM	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,09	20%
100-853DM	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,09	20%
100-854DM	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,11	20%
100-855DM	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,11	20%
100-856DM	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16	20%
100-857DM	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16	20%
100-866DM	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
100-867DM	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
100-872DM	В	0,36	0,01	0,64	0,01	0,22	20%
100-873DM	Н	0,36	0,01	0,64	0,01	0,22	20%
100-874DM	В	0,41	0,01	0,64	0,01	0,25	20%
100-875DM	Н	0,41	0,01	0,64	0,01	0,25	20%


11.26. Дуги ортодонтические никель-титановые NT OVAL ARCH FORM III.

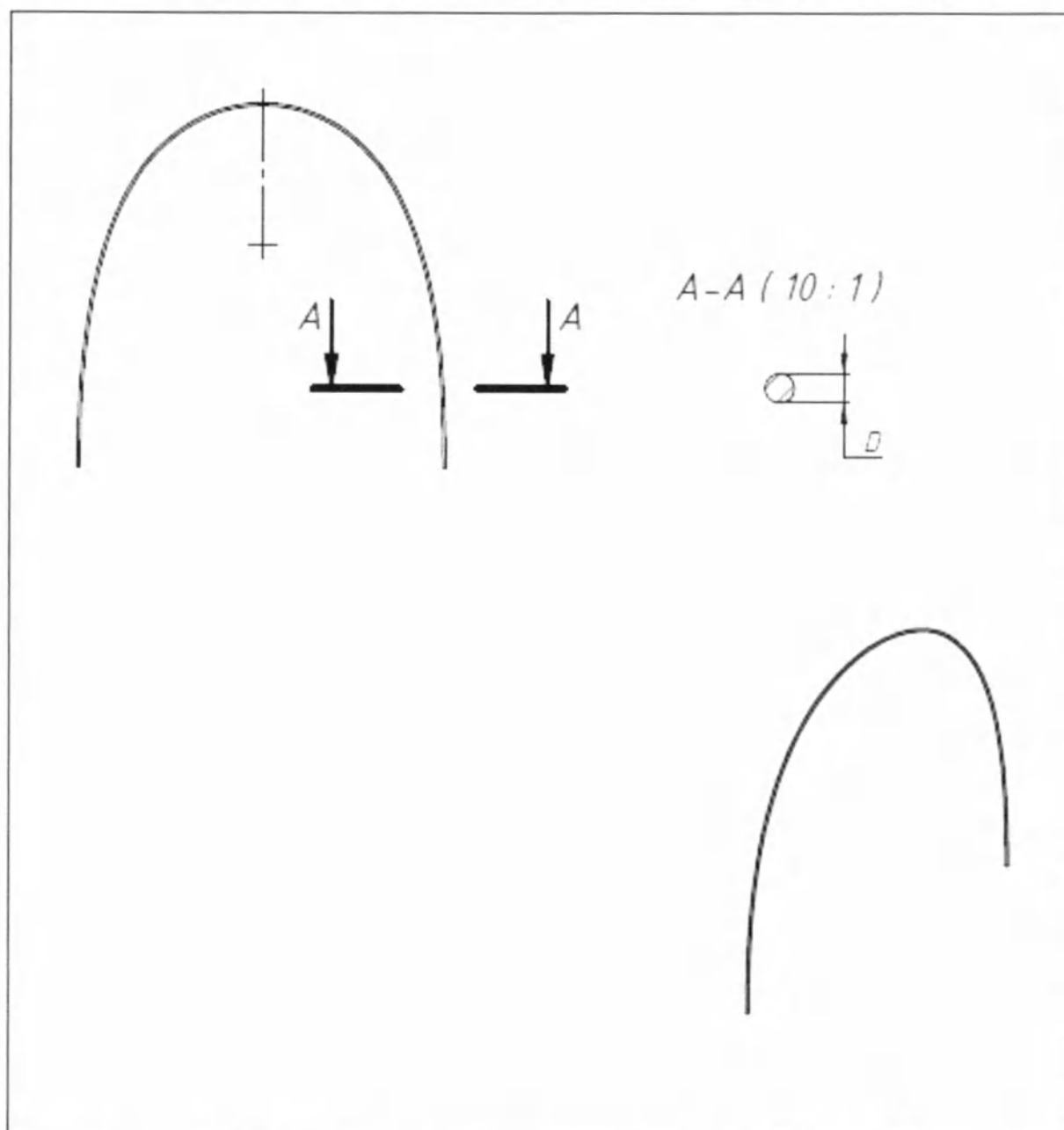

Дуги ортодонтические никель-титановые NT OVAL ARCH FORM III

Номер по каталогу	Нижняя (Н) Верхняя (В)	Размеры (мм)		Масса (г)	
		Диаметр (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
101-430	Н	0,30	0,01	0,07	20%
101-431	В	0,30	0,01	0,07	20%
101-432	В	0,36	0,01	0,08	20%
101-433	В	0,36	0,01	0,08	20%
101-434	Н	0,41	0,01	0,10	20%
101-435	В	0,41	0,01	0,10	20%
101-436	В	0,46	0,01	0,12	20%
101-437	Н	0,46	0,01	0,12	20%
101-438	В	0,51	0,01	0,15	20%
101-439	Н	0,51	0,01	0,15	20%


11.27. Дуги ортодонтические никель-титановые NT OVAL ARCH FORM.

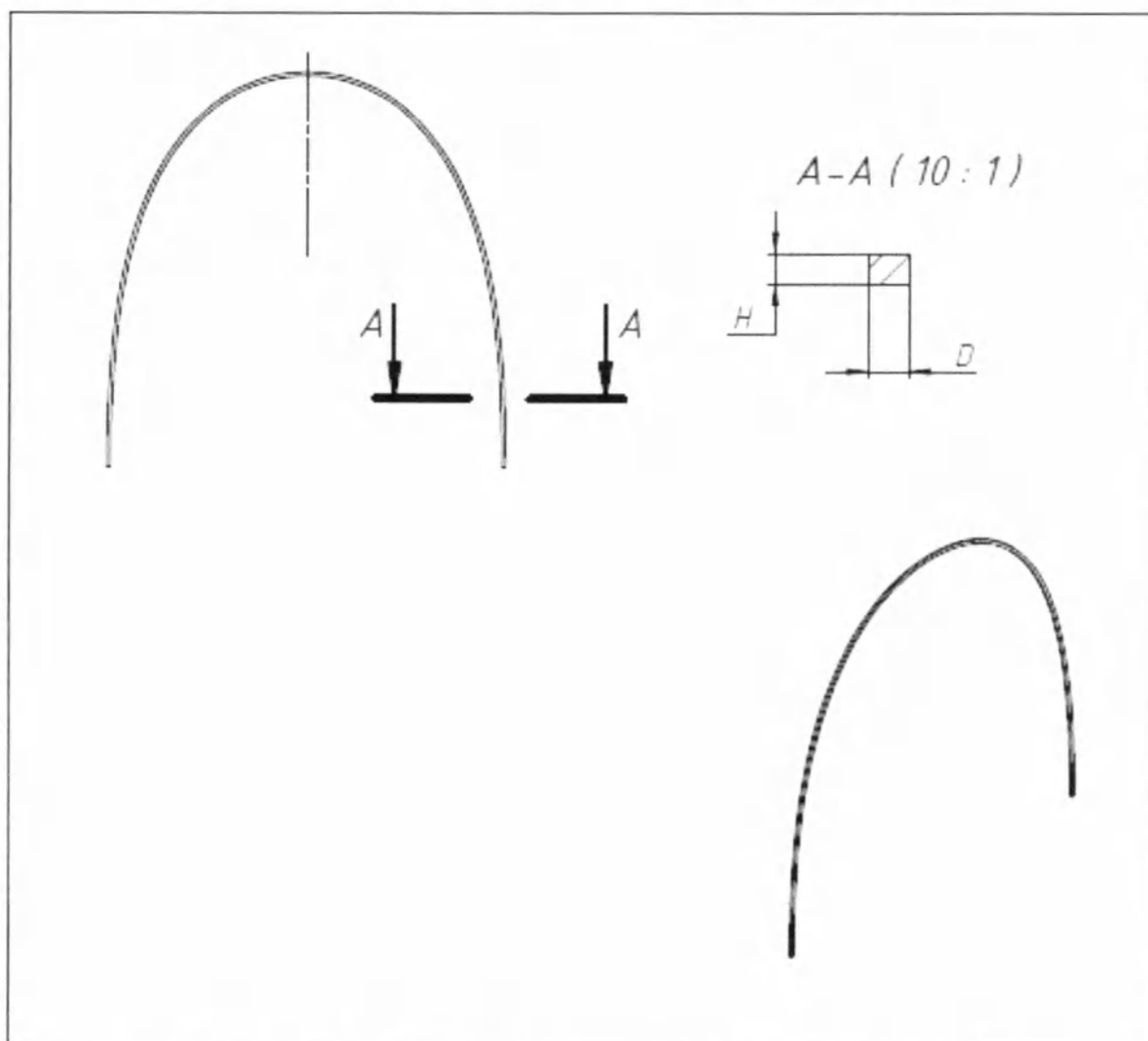

Дуги ортодонтические никель-титановые NT OVAL ARCH FORM

Номер по каталогу	Размеры (мм)				Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Масса (г)	
	Глубина (D)	±Доп.	Высота (H)	±Доп.		Масса	±Доп.
101-440	0,41	0,01	0,41	0,01	В	0,16	20%
101-441	0,41	0,01	0,41	0,01	Н	0,16	20%
101-442	0,56	0,01	0,41	0,01	В	0,18	20%
101-443	0,56	0,01	0,41	0,01	Н	0,18	20%
101-444	0,64	0,01	0,43	0,01	В	0,21	20%
101-445	0,64	0,01	0,43	0,01	Н	0,21	20%
101-446	0,46	0,01	0,46	0,01	В	0,18	20%
101-447	0,46	0,01	0,46	0,01	Н	0,18	20%
101-448	0,64	0,01	0,46	0,01	В	0,23	20%
101-449	0,64	0,01	0,46	0,01	Н	0,23	20%
101-450	0,64	0,01	0,48	0,01	В	0,25	20%
101-451	0,64	0,01	0,48	0,01	Н	0,25	20%
101-452	0,64	0,01	0,53	0,01	В	0,30	20%
101-453	0,64	0,01	0,53	0,01	Н	0,30	20%


11.28. Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH.

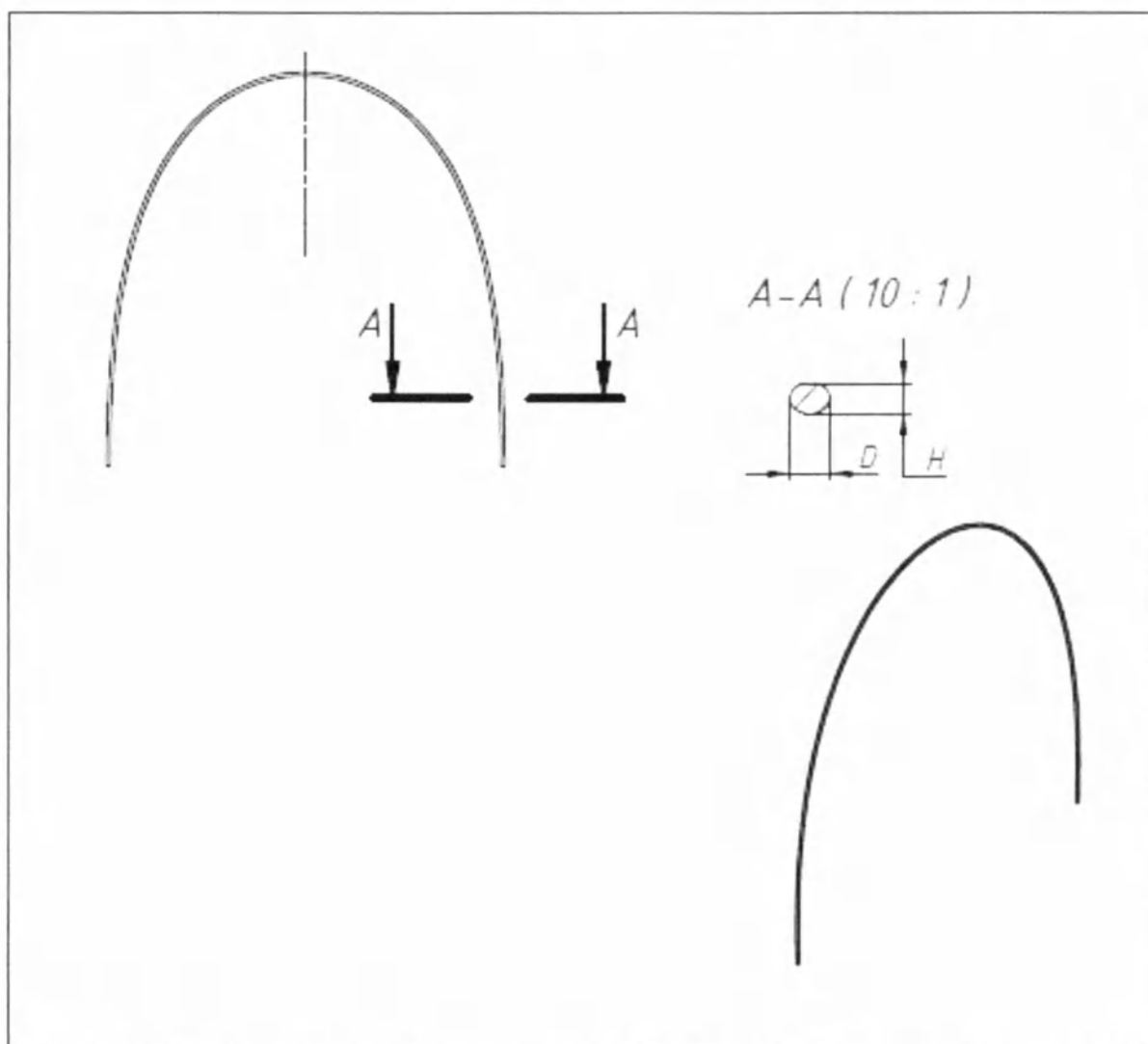

Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX NITANIUM OVAL ARCH


Номер по каталогу	Размеры (мм)				Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Масса (г)	
	Глубина (D)	±Доп.	Высота (H)	±Доп.		Масса	±Доп.
101-462	0,36	0,01	0,36	0,01	В	0,10	20%
101-463	0,36	0,01	0,36	0,01	Н	0,10	20%
101-464	0,41	0,01	0,41	0,01	В	0,13	20%
101-465	0,41	0,01	0,41	0,01	Н	0,13	20%
101-466	0,46	0,01	0,46	0,01	В	0,16	20%
101-467	0,46	0,01	0,46	0,01	Н	0,16	20%
101-470	0,41	0,01	0,41	0,01	В	0,17	20%
101-471	0,41	0,01	0,41	0,01	Н	0,17	20%
101-472	0,56	0,01	0,41	0,01	В	0,16	20%
101-473	0,56	0,01	0,41	0,01	Н	0,16	20%
101-474	0,64	0,01	0,43	0,01	В	0,19	20%
101-475	0,64	0,01	0,43	0,01	Н	0,19	20%
101-480	0,64	0,01	0,48	0,01	В	0,22	20%
101-481	0,64	0,01	0,48	0,01	Н	0,22	20%


11.29. Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX PLUS.

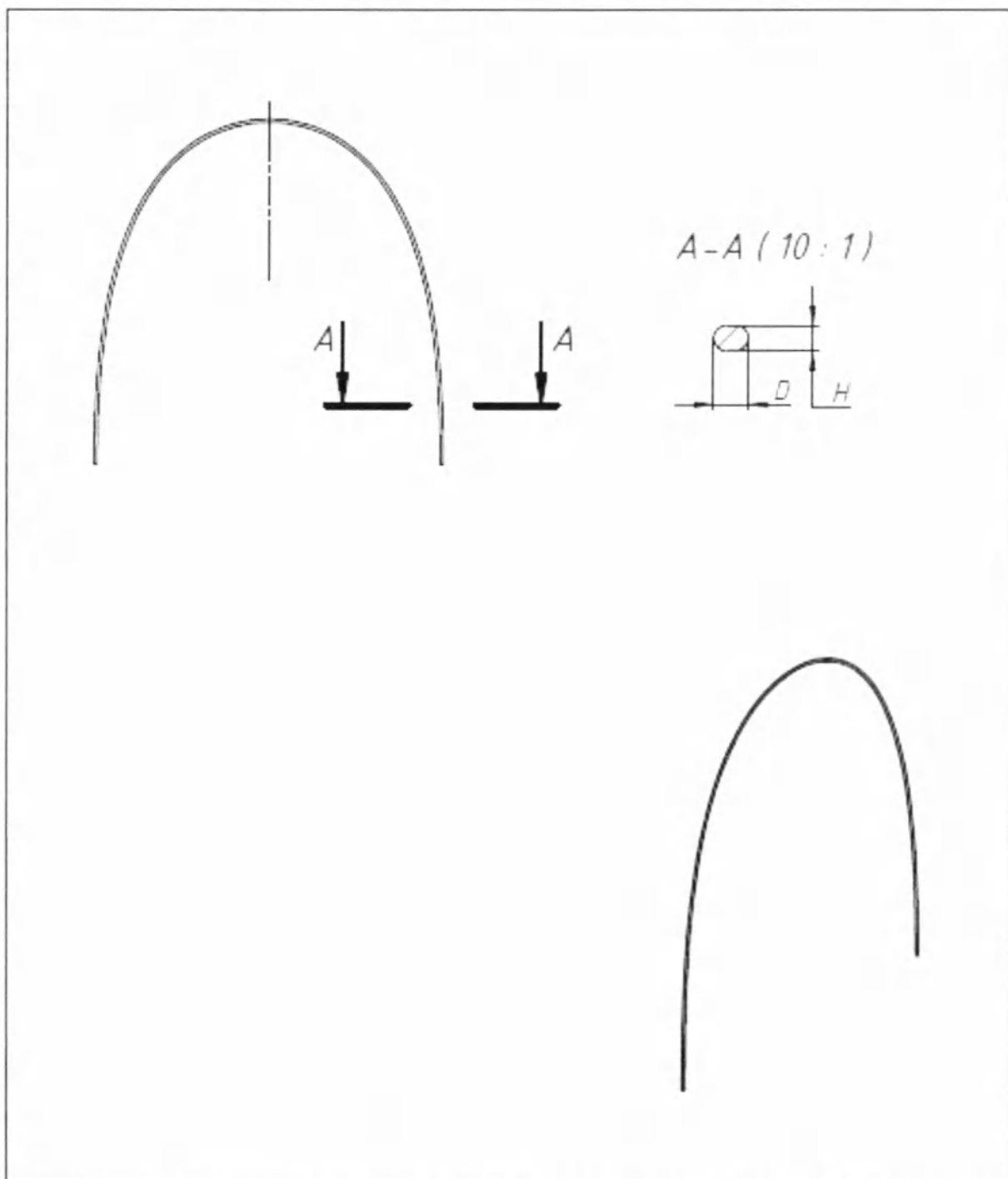

Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX PLUS							
Номер по каталогу	Стандартная (С)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Глубина (D)	±Доп.	Высота (H)	±Доп.	Масса	±Доп.
103-100	С	0,33	0,01	0,33	0,01	0,08	20%
103-101	С	0,36	0,01	0,36	0,01	0,10	20%
103-102	С	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
103-103	С	0,46	0,01	0,46	0,01	0,15	20%
103-104	С	0,64	0,01	0,36	0,01	0,20	20%
103-105	С	0,64	0,01	0,41	0,01	0,26	20%
103-106	С	0,64	0,01	0,46	0,01	0,29	20%

Дуги ортодонтические нуклеар-титановые BIO-KINETIX PLUS						
Номер по каталогу	Верхняя(В)/Нижняя(Н)	Высота (H)	Размеры (мм)		Масса (г)	
			±Дон	Глубина (D)		
104-124	В	0,33	0,01	0,33	0,07	20%
104-125	Н	0,33	0,01	0,33	0,07	20%
104-126	В	0,36	0,01	0,36	0,09	20%
104-127	Н	0,36	0,01	0,36	0,09	20%
104-128	В	0,41	0,01	0,41	0,11	20%
104-129	Н	0,41	0,01	0,41	0,11	20%
104-130	В	0,46	0,01	0,46	0,13	20%
104-131	Н	0,46	0,01	0,46	0,13	20%
104-133	Н	0,36	0,01	0,64	0,18	20%
104-134	В	0,41	0,01	0,41	0,20	20%
104-135	Н	0,41	0,01	0,41	0,20	20%
104-136	В	0,41	0,01	0,56	0,22	20%
104-137	Н	0,41	0,01	0,56	0,22	20%
104-138	В	0,41	0,01	0,64	0,24	20%
104-139	Н	0,41	0,01	0,64	0,24	20%
104-140	В	0,43	0,01	0,64	0,27	20%
104-141	Н	0,43	0,01	0,64	0,27	20%
104-142	В	0,46	0,01	0,64	0,29	20%
104-143	Н	0,46	0,01	0,64	0,29	20%
104-144	В	0,48	0,01	0,64	0,31	20%
104-145	Н	0,48	0,01	0,64	0,31	20%
104-146	В	0,53	0,01	0,64	0,33	20%
104-147	Н	0,53	0,01	0,64	0,33	20%

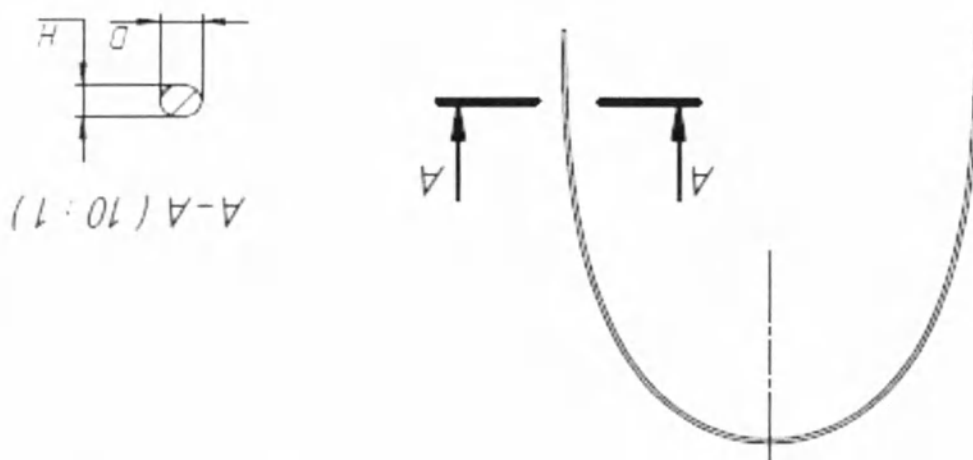


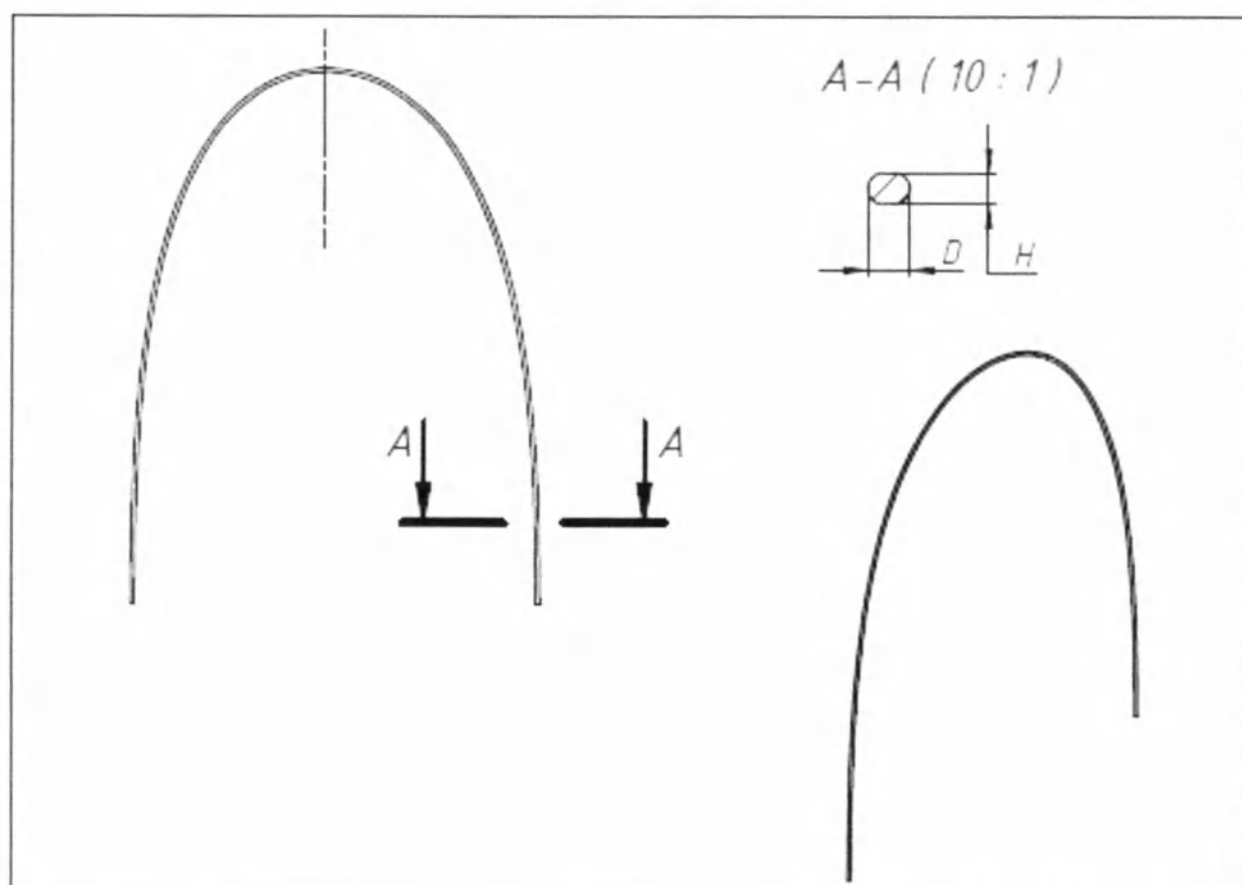


Дуги ортодонтические никель-титановые BIO-KINETIX PLUS

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
104-152	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,13	20%
104-153	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,13	20%
104-154	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,15	20%
104-155	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,15	20%
104-156	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,17	20%
104-157	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,17	20%
104-158	В	0,36	0,01	0,64	0,01	0,19	20%
104-159	Н	0,36	0,01	0,64	0,01	0,19	20%
104-161	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,21	20%
104-162	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,23	20%
104-163	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,23	20%
104-164	В	0,41	0,01	0,64	0,01	0,26	20%
104-165	Н	0,41	0,01	0,64	0,01	0,26	20%
104-166	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
104-167	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
104-168	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
104-169	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
104-170	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,32	20%
104-171	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,32	20%

11.30. Дуги ортодонтические никель-титановые D-LX Bio-Kinetix.

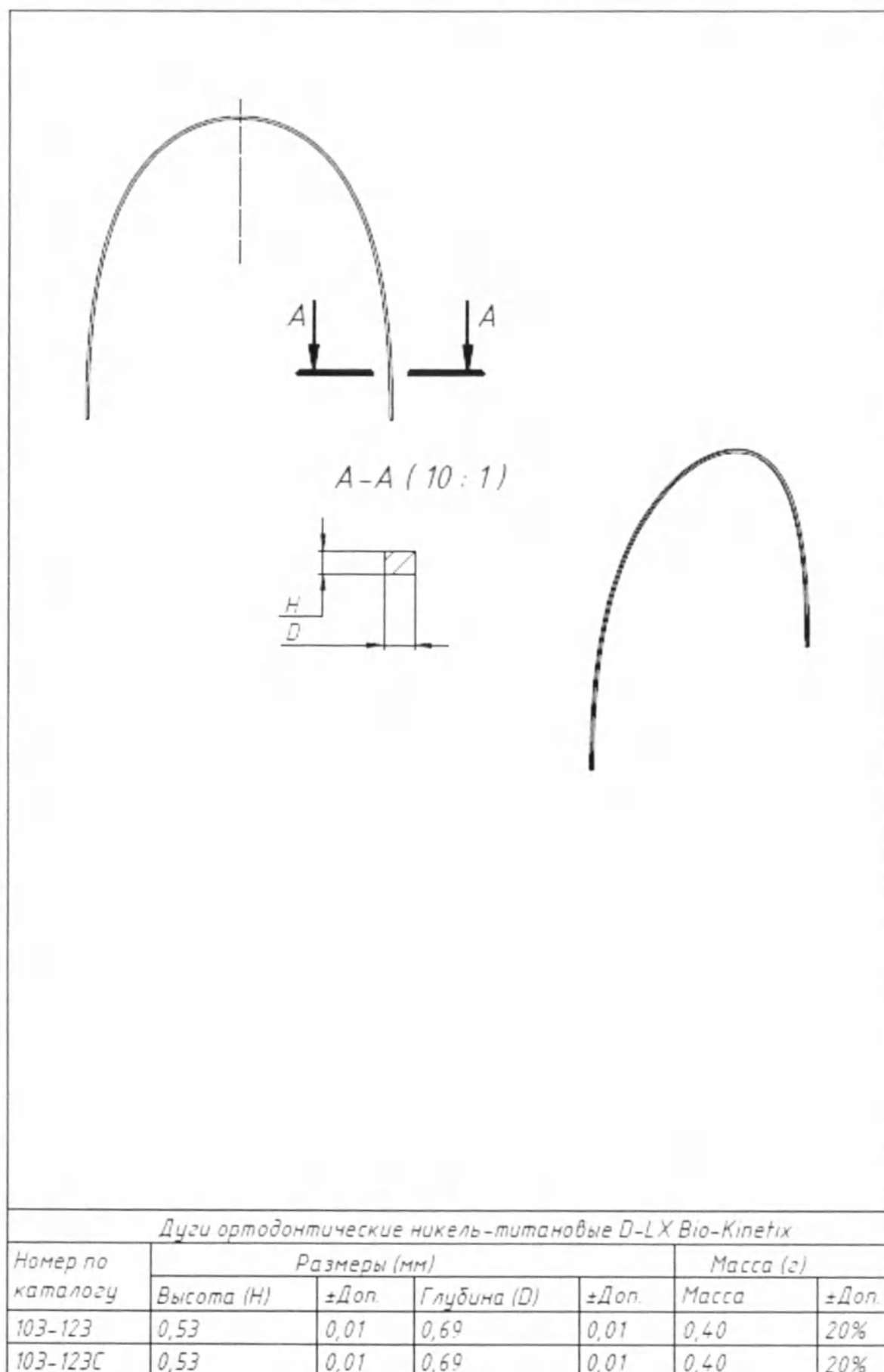


11.31. Дуги ортодонтические бета-титановые BETA CNA ARCHWIRE.

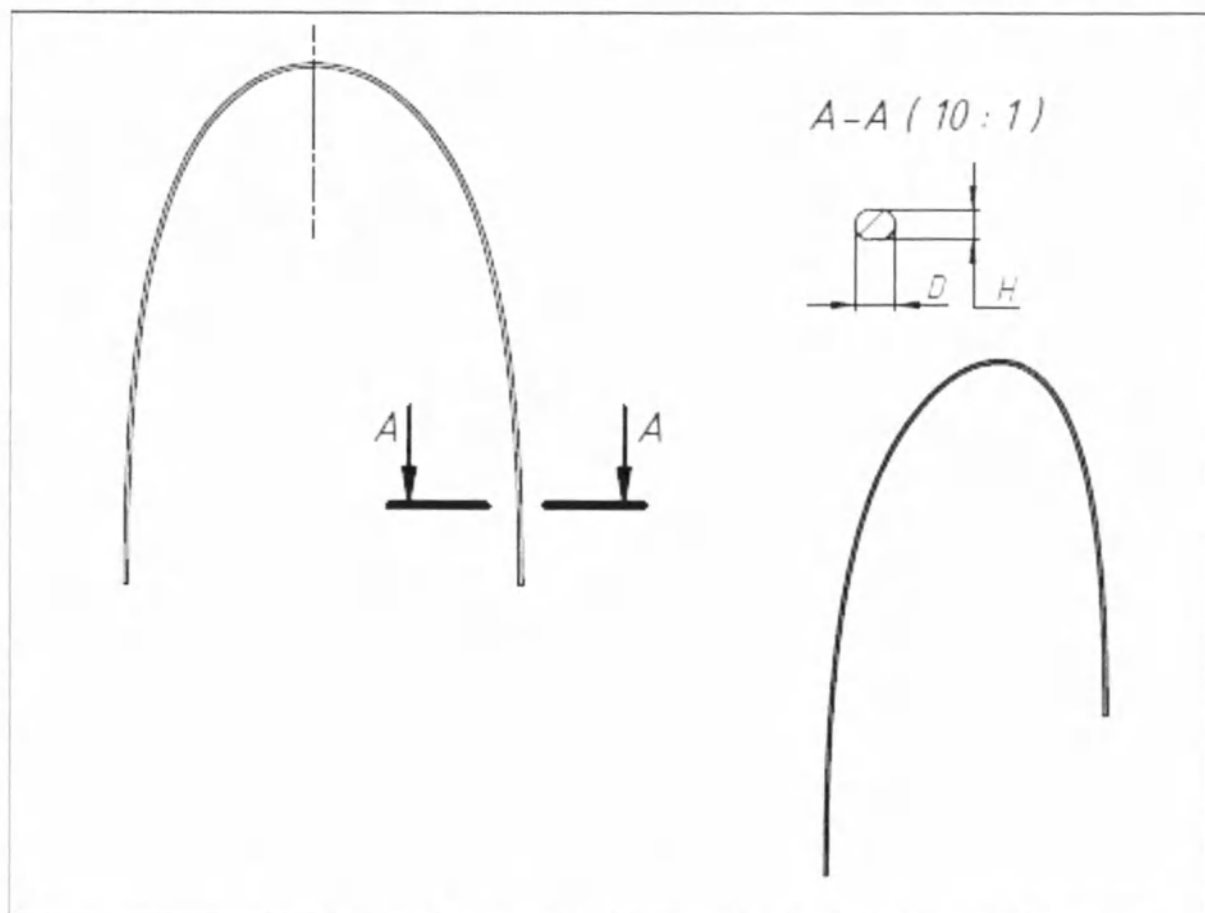

Дуги ортодонтические бета-титановые BETA CNA WIRE ARCHWIRE

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-941	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,12	20%
100-942	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,15	20%
100-944	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,20	20%
100-945	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,21	20%
100-946	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,15	20%
100-947	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,20	20%
100-948	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,24	20%
100-949	В	0,53	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
100-951	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,12	20%
100-952	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,15	20%
100-954	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,20	20%
100-955	Н	0,43	0,01	0,65	0,01	0,25	20%
100-956	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,27	20%
100-957	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
100-958	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
100-959	Н	0,53	0,01	0,64	0,01	0,32	20%
100-960	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,12	20%
100-961	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,12	20%


11.32. Дуги ортодонтические бета-титановые CNA INTRUSION ARCH.

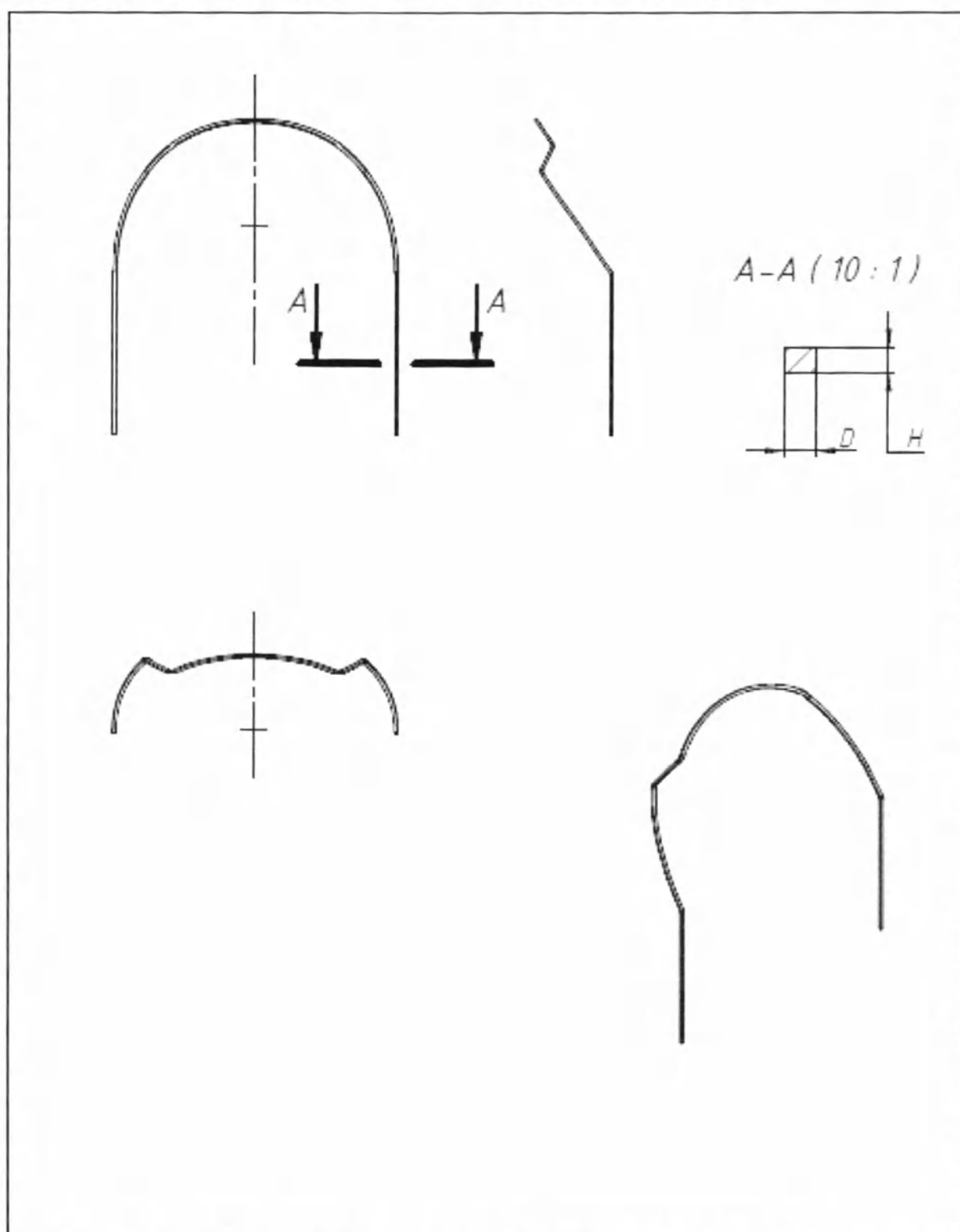

Дуги ортодонтические бета-титановые CNA INTRUSION ARCH

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
100-971	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,18	20%
100-973	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,18	20%
100-975	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,22	20%
100-977	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,22	20%


11.33. Дуги ортодонтические бета-титановые CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE.

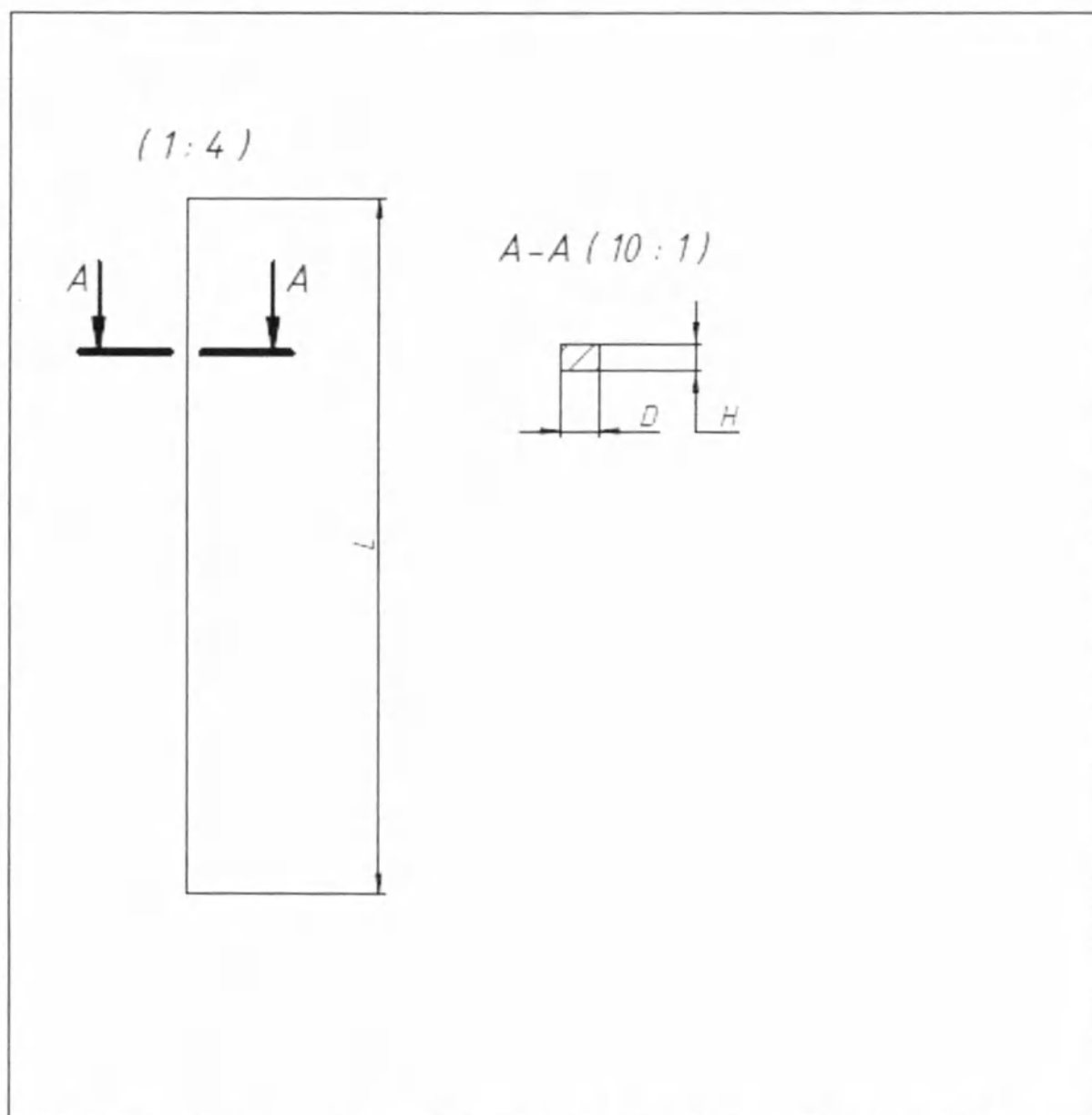

Дуги ортодонтические бета-титановые CNA BETA III 14" STRAIGHT WIRE

Номер по каталогу	Длина (L) мм	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
101-003	355,6	0,41	0,01	0,41	0,01	0,28	20%
101-004	355,6	0,46	0,01	0,46	0,01	0,30	20%
101-022	355,6	0,81	0,01	0,81	0,01	0,40	20%
101-024	355,6	0,91	0,01	0,91	0,01	1,30	20%
101-007	355,6	0,41	0,01	0,41	0,01	0,30	20%
101-008	355,6	0,41	0,01	0,56	0,01	0,35	20%
101-009	355,6	0,43	0,01	0,64	0,01	0,40	20%
101-010	355,6	0,46	0,01	0,46	0,01	0,39	20%
101-011	355,6	0,46	0,01	0,64	0,01	0,47	20%
101-012	355,6	0,48	0,01	0,64	0,01	0,40	20%
101-013	355,6	0,53	0,01	0,64	0,01	0,55	20%


11.34. Дуги ортодонтические бета-титановые CNA OVAL ARCH III.

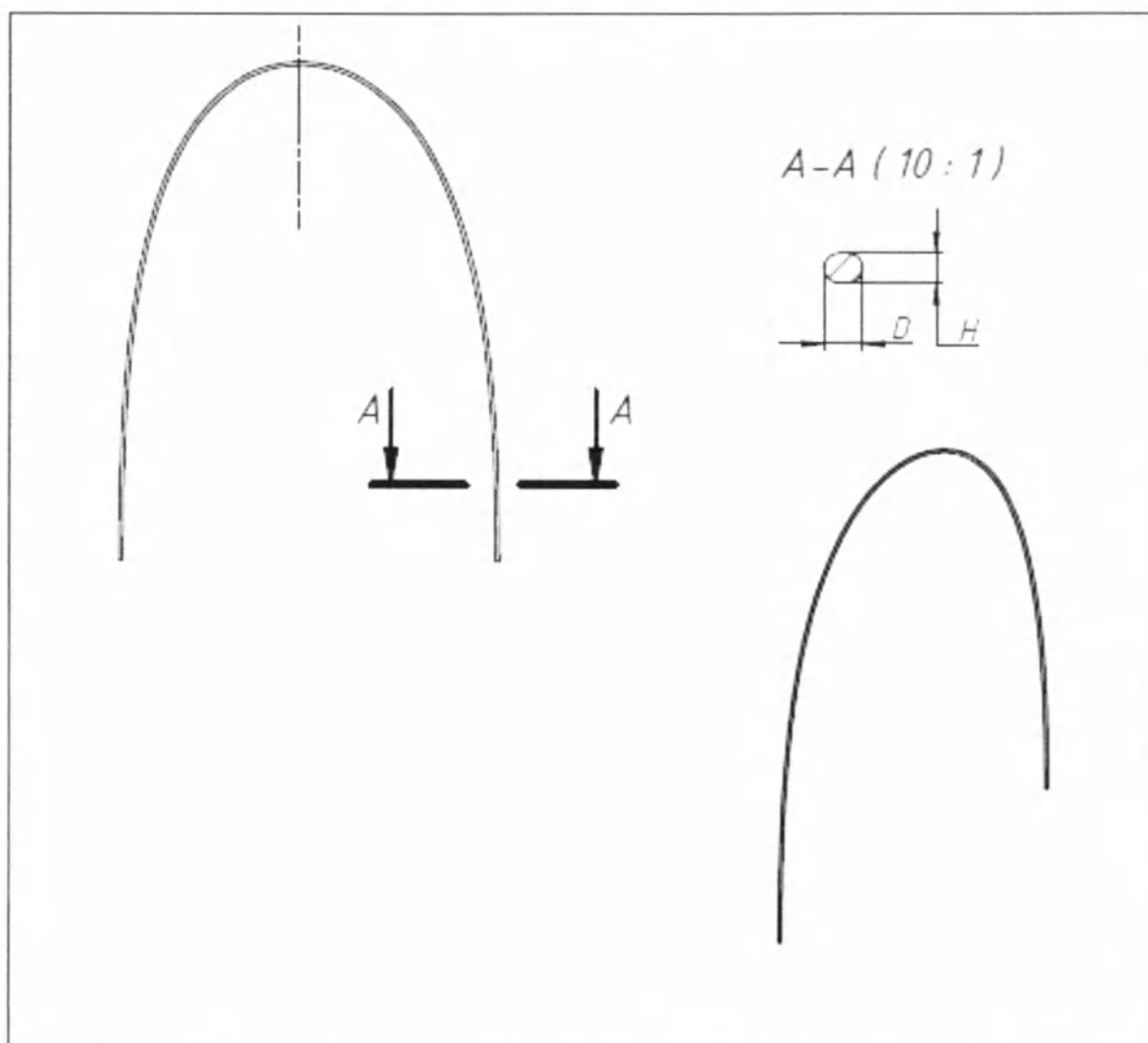


Дуги ортодонтические бета-титановые CNA OVAL ARCH III

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
101-504	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
101-505	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
101-506	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,17	20%
101-507	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,17	20%
101-512	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,20	20%
101-513	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,20	20%
101-514	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,21	20%
101-515	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,21	20%
101-516	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,27	20%
101-517	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,27	20%
101-518	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
101-519	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
101-520	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,32	20%
101-521	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,32	20%


11.35. Дуга ортодонтическая бета-титановая M-Series Beta Titanium D-LX.

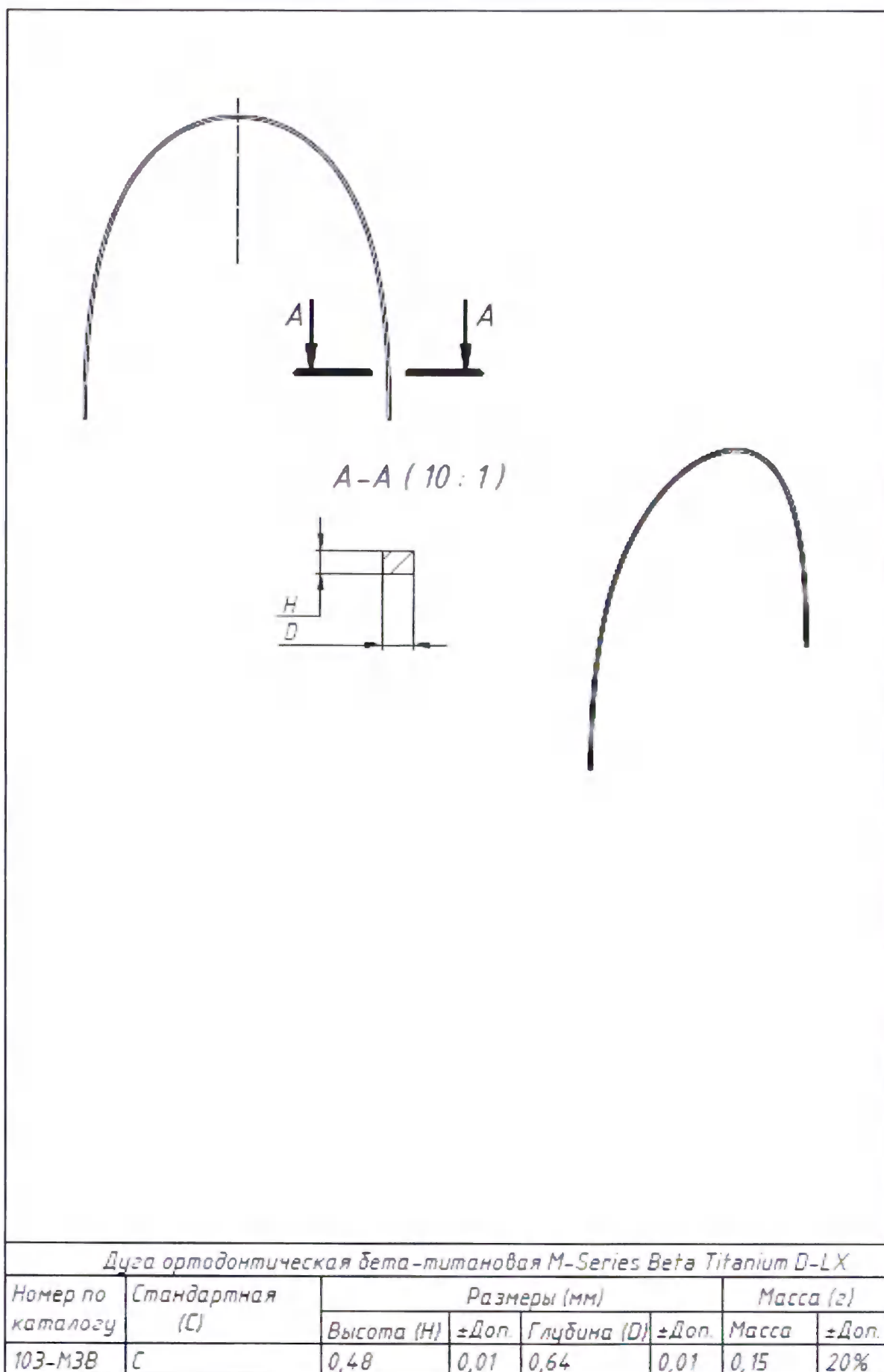

11.36. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая Cu Nitanium 35° D-LX R.C.S.
Straight Leg.

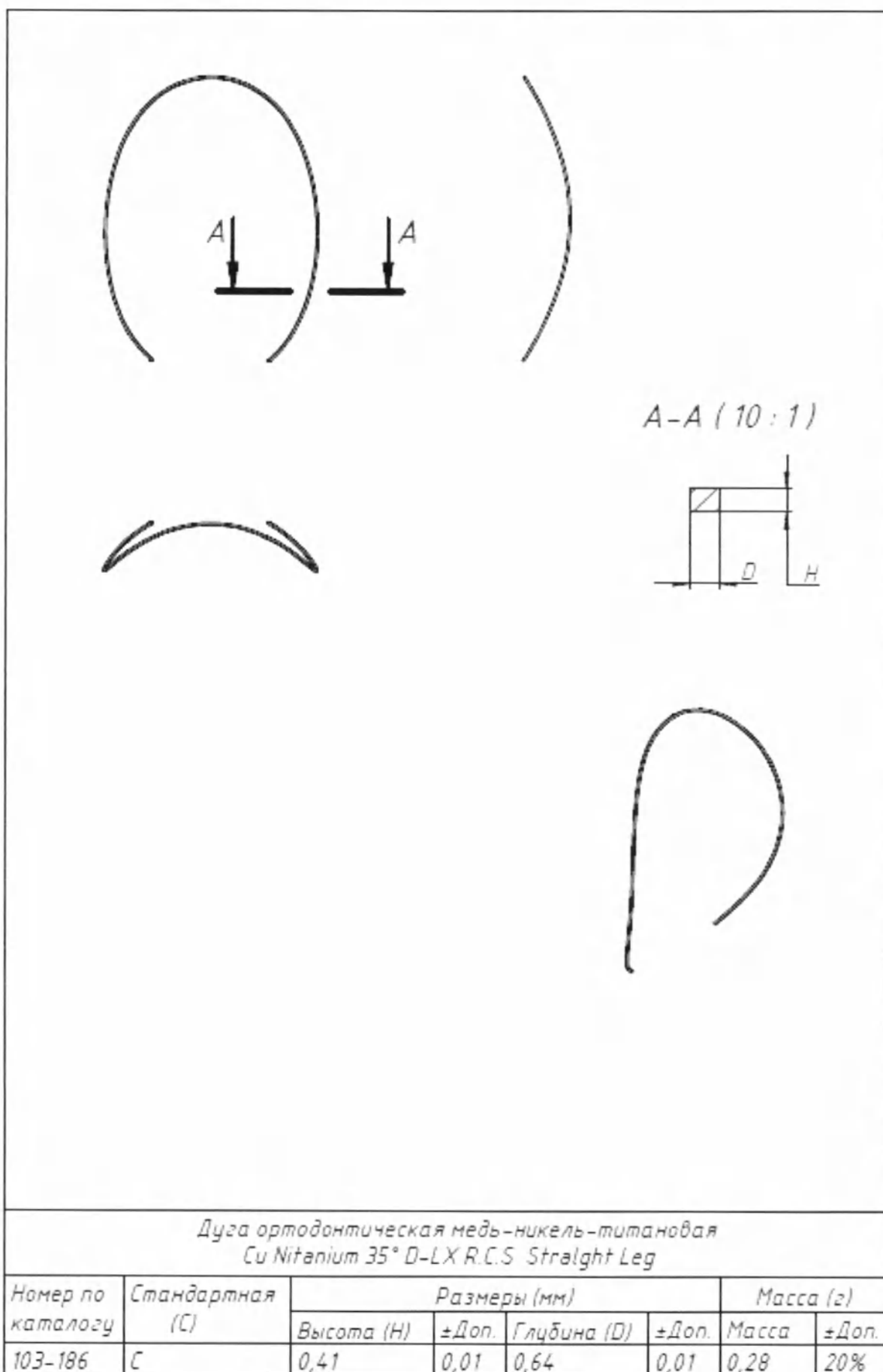


11.37. Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu Nitanium 27°.

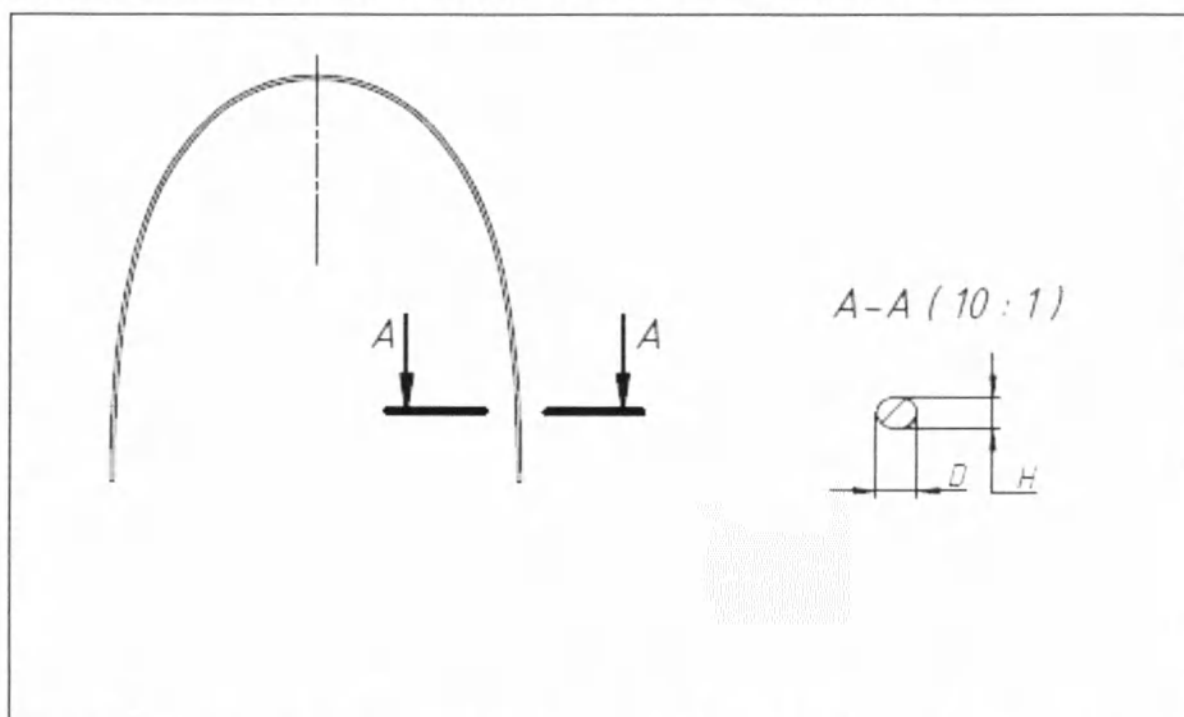


Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu Nitanium 27°

Номер по каталогу	Стандартная(С) Со ступором(С/С) Без ступора(Б/С)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
103-191	Б/С	0,33	0,01	0,33	0,01	0,09	20%
103-191C	С	0,33	0,01	0,33	0,01	0,09	20%
103-191ST	С/С	0,33	0,01	0,33	0,01	0,09	20%
103-192	Б/С	0,36	0,01	0,36	0,01	0,15	20%
103-192C	С	0,36	0,01	0,36	0,01	0,15	20%
103-192ST	С/С	0,36	0,01	0,36	0,01	0,15	20%
103-193	Б/С	0,41	0,01	0,41	0,01	0,14	20%
103-193ST	С/С	0,41	0,01	0,41	0,01	0,16	20%
103-194	Б/С	0,46	0,01	0,46	0,01	0,14	20%
103-194ST	С/С	0,46	0,01	0,46	0,01	0,18	20%
103-195	Б/С	0,36	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
103-195C	С	0,36	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
103-195ST	С/С	0,36	0,01	0,64	0,01	0,25	20%
103-196	Б/С	0,41	0,01	0,64	0,01	0,27	20%
103-196ST	С/С	0,41	0,01	0,64	0,01	0,27	20%
103-197	Б/С	0,43	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
103-197ST	С/С	0,43	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
103-198	Б/С	0,46	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
103-198ST	С/С	0,46	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
103-199	Б/С	0,48	0,01	0,64	0,01	0,32	20%
103-199ST	С/С	0,48	0,01	0,64	0,01	0,32	20%

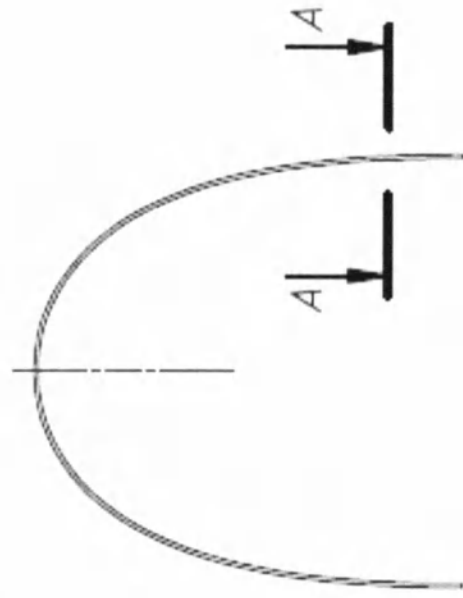


A-A (10:1)

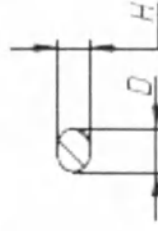


Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu Nitantium 27°

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)			Масса (г)	
		Высота (Н)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса ±Доп.
109-142	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,12 20%
109-143	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,12 20%
109-144	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,07 20%
109-145	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,07 20%
109-146	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,10 20%
109-147	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,10 20%
109-148	В	0,36	0,01	0,64	0,01	0,11 20%
109-149	Н	0,36	0,01	0,64	0,01	0,11 20%
109-150	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,13 20%
109-151	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,13 20%
109-152	В	0,41	0,01	0,64	0,01	0,15 20%
109-153	Н	0,41	0,01	0,64	0,01	0,15 20%
109-154	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,18 20%
109-155	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,18 20%
109-158	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,25 20%
109-159	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,25 20%

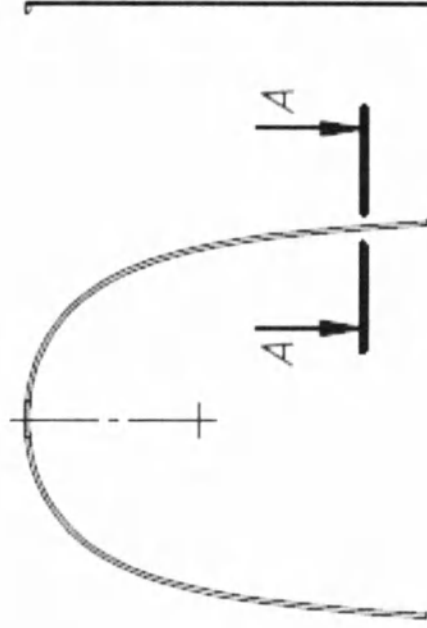


A-A (10:1)

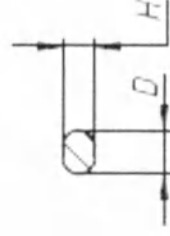

Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu-Ni-Ti 27°

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)			Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса ±Доп.
109-242	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,12 20%
109-243	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,12 20%
109-244	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,14 20%
109-245	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,14 20%
109-246	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16 20%
109-247	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16 20%
109-248	В	0,36	0,01	0,64	0,01	0,17 20%
109-249	Н	0,36	0,01	0,64	0,01	0,17 20%
109-250	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,21 20%
109-251	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,21 20%
109-252	В	0,41	0,01	0,64	0,01	0,27 20%
109-253	Н	0,41	0,01	0,65	0,01	0,27 20%


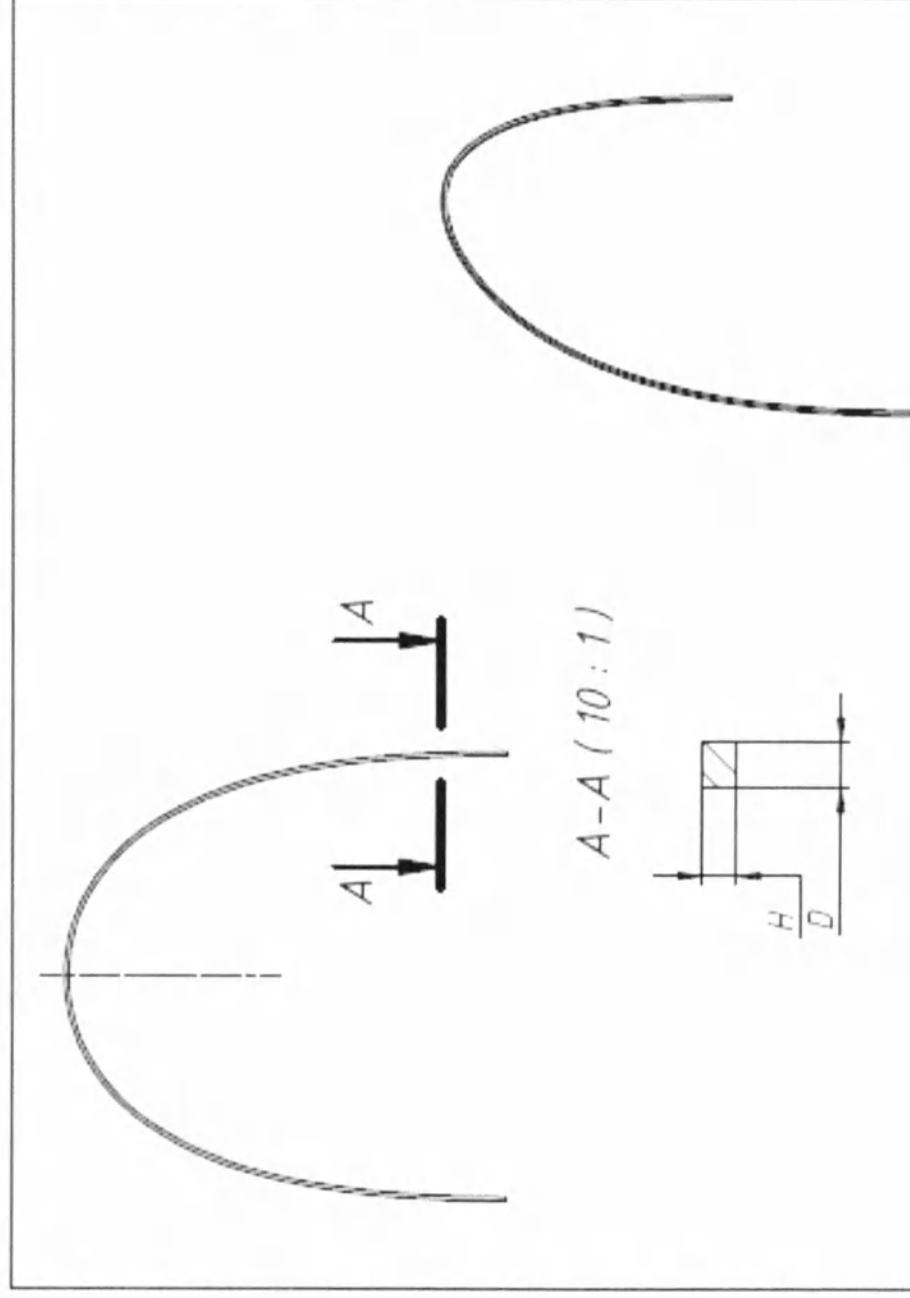


Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu-Ni-Ti 27°

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)			Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса ±Доп.
109-342	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,10 20%
109-343	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,10 20%
109-344	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13 20%
109-345	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13 20%
109-346	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,15 20%
109-347	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,15 20%
109-348	В	0,36	0,01	0,64	0,01	0,13 20%
109-349	Н	0,36	0,01	0,64	0,01	0,14 20%
109-350	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,20 20%
109-351	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,20 20%
109-352	В	0,41	0,01	0,64	0,01	0,22 20%
109-353	Н	0,41	0,01	0,64	0,01	0,22 20%
109-354	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,25 20%
109-355	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,25 20%
109-358	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,28 20%
109-359	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,28 20%


Номер по каталогу	Верхняя(В)/Нижняя(Н)	Высота (Н)	±дон.	Глубина (D)	±дон.	Размеры (мм)		Масса (г)
						Масса	±дон.	
109-472	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,10	0,01	20%
109-473	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,11	0,01	20%
109-474	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,14	0,01	20%
109-475	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,15	0,01	20%
109-476	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,17	0,01	20%
109-477	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,18	0,01	20%
109-478	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,10	0,01	20%
109-479	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,11	0,01	20%
109-450	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,18	0,01	20%
109-451	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,19	0,01	20%
109-452	В	0,41	0,01	0,64	0,01	0,23	0,01	20%
109-453	Н	0,41	0,01	0,64	0,01	0,24	0,01	20%

Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu-Ni-Ti 27°

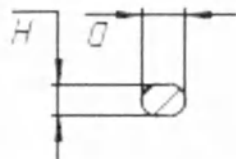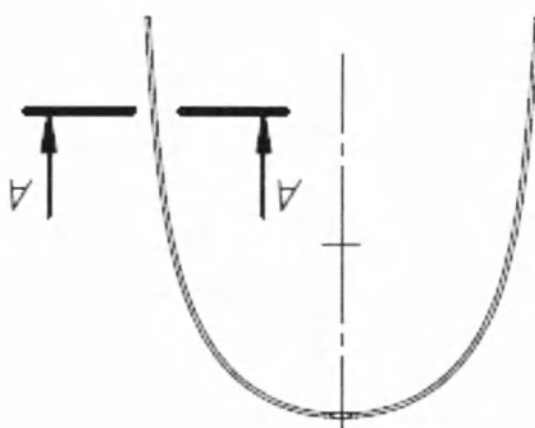

A-A (10:1)


11.38. Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu Nitanium 27°.

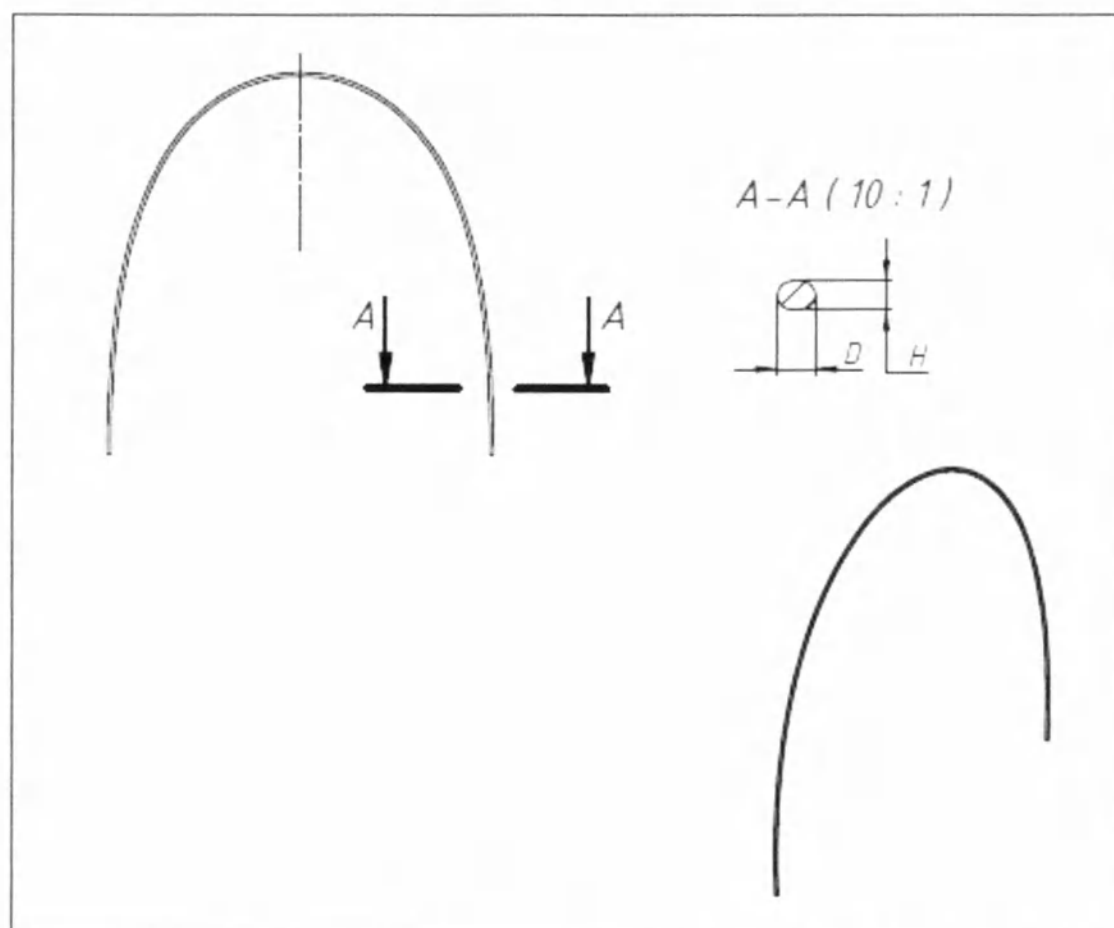

Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu Nitanium 27°


Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
109-542	В	0,36	0,01	0,36	0,01	0,10	20%
109-543	Н	0,36	0,01	0,36	0,01	0,11	20%
109-544	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,14	20%
109-545	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,15	20%
109-546	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,18	20%
109-547	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,19	20%
109-548	В	0,36	0,01	0,64	0,01	0,22	20%
109-549	Н	0,36	0,01	0,64	0,01	0,23	20%
109-550	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,27	20%
109-551	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,28	20%
109-552	В	0,41	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
109-553	Н	0,41	0,01	0,64	0,01	0,31	20%
109-554	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,33	20%
109-555	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,34	20%
109-558	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,40	20%
109-559	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,41	20%

11.39. Дуги ортодонтические медь-никель-титановые CuNitanium 35°.

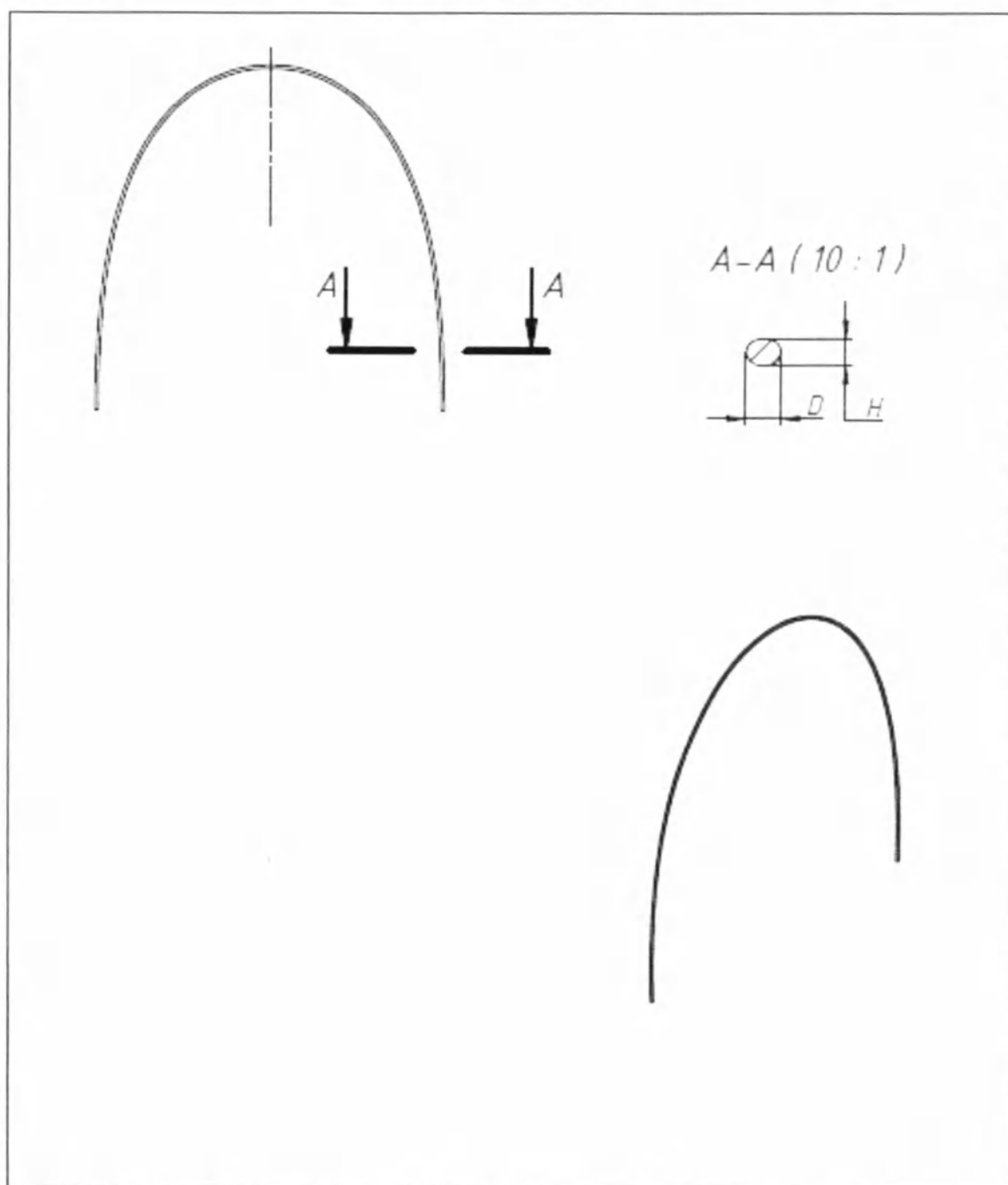


Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая CuNitanium 35°

Номер по каталогу	Стандартная(С) Со ступором(С/С) Без ступора(Б/С)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
103-200	Б/С	0,43	0,01	0,64	0,01	0,36	20%
103-200С	С	0,43	0,01	0,64	0,01	0,35	20%
103-200ST	С/С	0,43	0,01	0,64	0,01	0,35	20%
103-201	Б/С	0,48	0,01	0,64	0,01	0,35	20%
103-201С	С	0,48	0,01	0,64	0,01	0,39	20%
103-201ST	С/С	0,48	0,01	0,64	0,01	0,39	20%

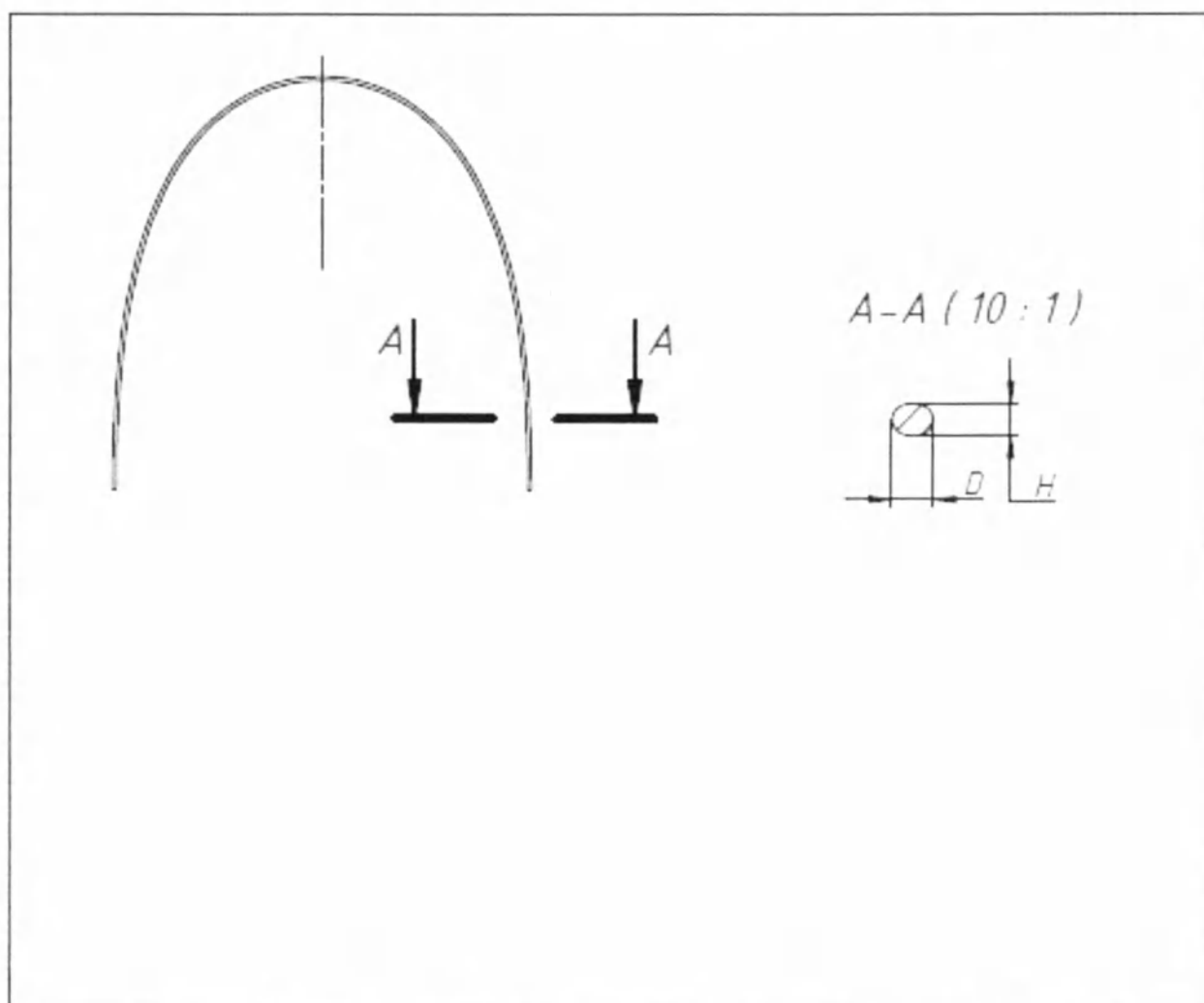


Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая CuNitanium 35°

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
109-162	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
109-163	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
109-164	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,18	20%
109-165	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,18	20%
109-168	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,21	20%
109-169	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,21	20%
109-170	В	0,43	0,01	0,43	0,01	0,30	20%
109-171	Н	0,43	0,01	0,43	0,01	0,30	20%
109-172	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,33	20%
109-173	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,33	20%
109-174	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,36	20%
109-175	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,36	20%
109-176	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,39	20%
109-177	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,39	20%
109-178	В	0,51	0,01	0,51	0,01	0,42	20%
109-179	Н	0,51	0,01	0,51	0,01	0,42	20%

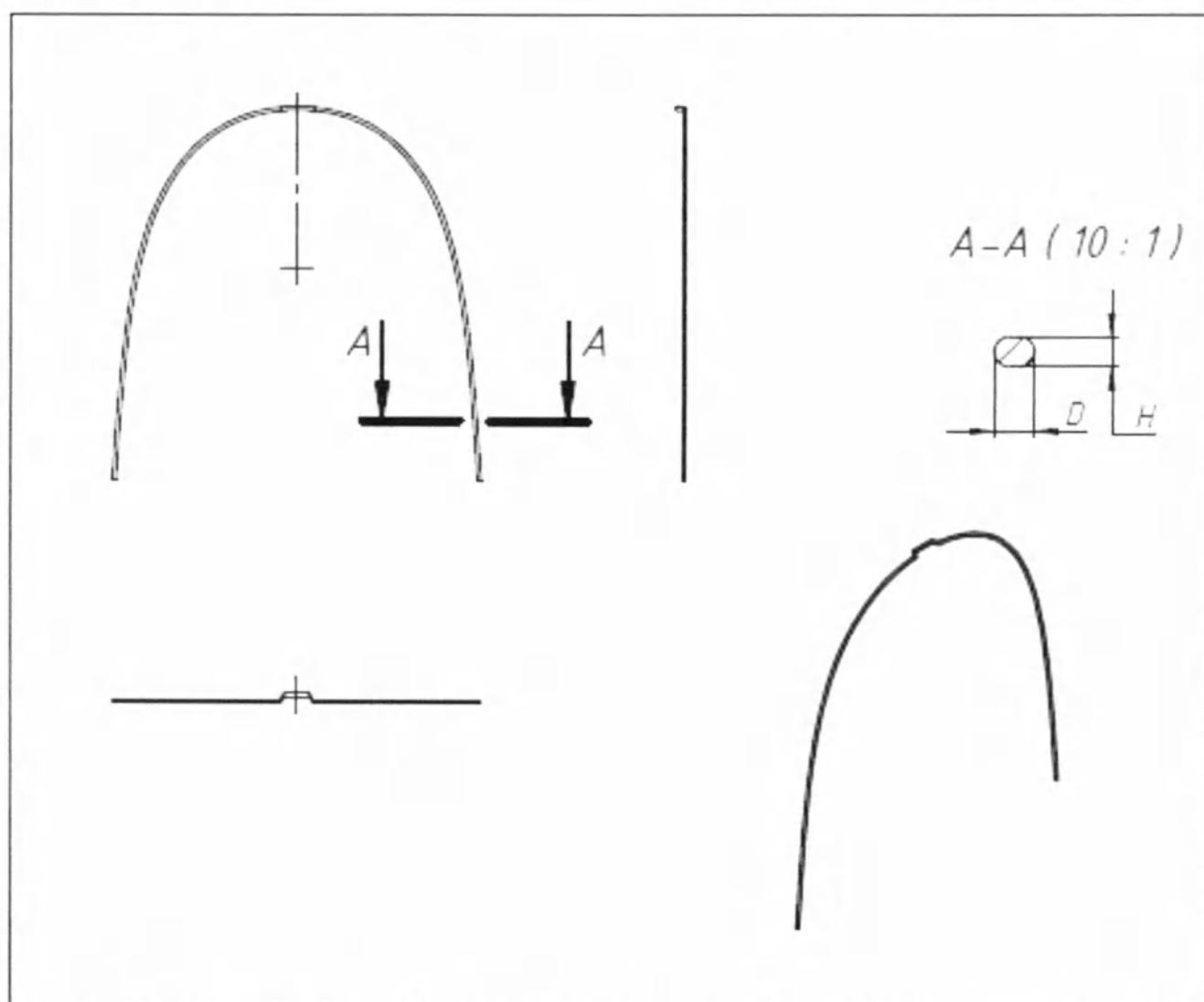

Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая CuNitanium 35°


Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
109-262	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
109-263	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
109-264	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16	20%
109-265	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16	20%
109-268	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,22	20%
109-269	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,22	20%
109-270	В	0,43	0,01	0,43	0,01	0,25	20%
109-271	Н	0,43	0,01	0,43	0,01	0,25	20%
109-272	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
109-273	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
109-274	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
109-275	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
109-276	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,32	20%
109-277	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,32	20%
109-278	В	0,51	0,01	0,51	0,01	0,38	20%
109-279	Н	0,51	0,01	0,51	0,01	0,38	20%

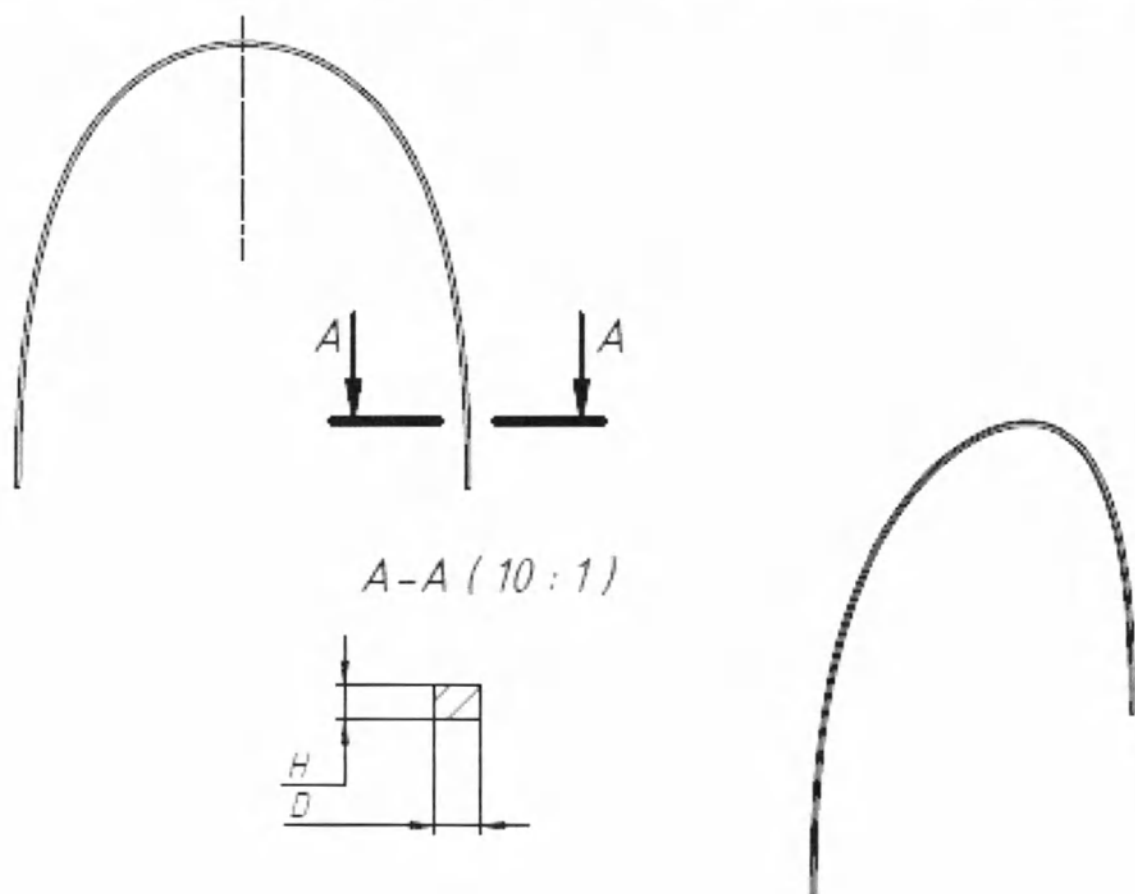

Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая CuNitanium 35°

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
109-362	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
109-363	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,13	20%
109-364	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16	20%
109-365	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,16	20%
109-368	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,20	20%
109-369	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,20	20%
109-370	В	0,43	0,01	0,43	0,01	0,22	20%
109-371	Н	0,43	0,01	0,43	0,01	0,22	20%
109-372	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,24	20%
109-373	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,24	20%
109-374	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
109-375	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
109-376	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,32	20%
109-377	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,32	20%
109-378	В	0,51	0,01	0,51	0,01	0,34	20%
109-379	Н	0,51	0,01	0,51	0,01	0,34	20%


11.40. Дуги ортодонтические медь-никель-титановые CuNitanium 35° Oval Arch Form III.

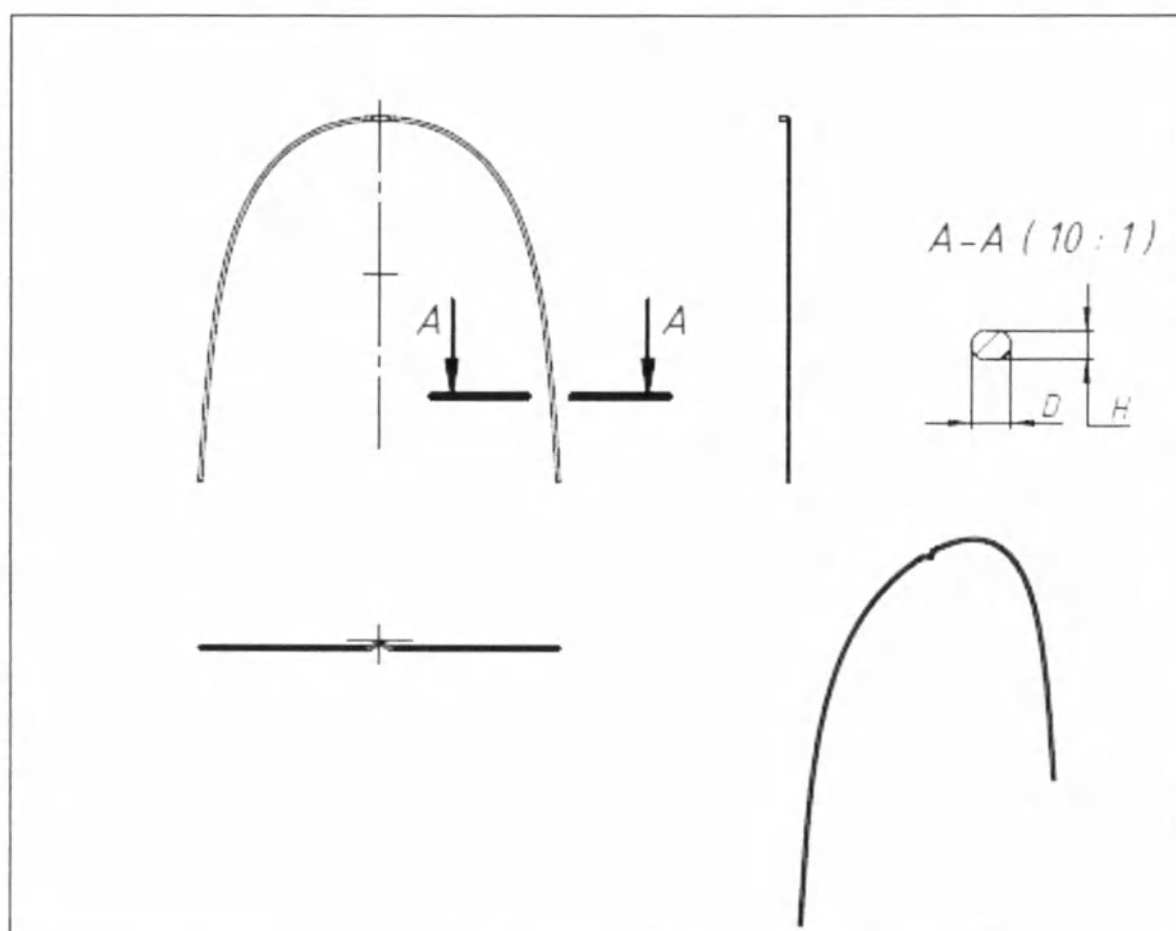

Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая
CuNitanium 35° Oval Arch Form III Archwire

Номер по каталогу	Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
109-462	В	0,41	0,01	0,41	0,01	0,15	20%
109-463	Н	0,41	0,01	0,41	0,01	0,15	20%
109-464	В	0,46	0,01	0,46	0,01	0,18	20%
109-465	Н	0,46	0,01	0,46	0,01	0,18	20%
109-468	В	0,41	0,01	0,56	0,01	0,22	20%
109-469	Н	0,41	0,01	0,56	0,01	0,22	20%
109-470	В	0,43	0,01	0,43	0,01	0,17	20%
109-471	Н	0,43	0,01	0,43	0,01	0,17	20%
109-472	В	0,43	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
109-473	Н	0,43	0,01	0,64	0,01	0,28	20%
109-474	В	0,46	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
109-475	Н	0,46	0,01	0,64	0,01	0,30	20%
109-476	В	0,48	0,01	0,64	0,01	0,34	20%
109-477	Н	0,48	0,01	0,64	0,01	0,34	20%
109-478	В	0,51	0,01	0,51	0,01	0,40	20%
109-479	Н	0,51	0,01	0,51	0,01	0,40	20%


11.41. Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu Nitanium 35° Pro Form Archwire.

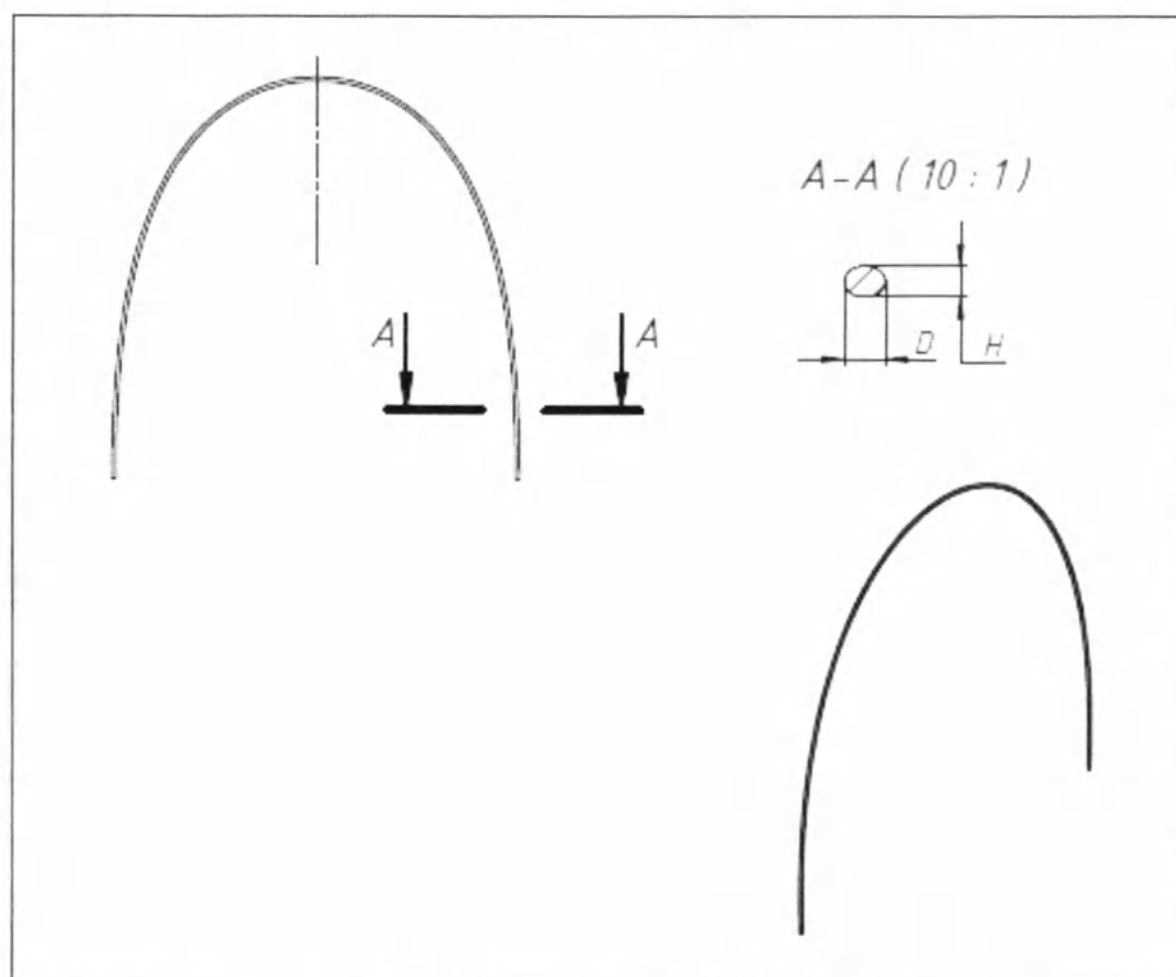

Дуги ортодонтические медь-никель-титановые Cu Nitanium 35° ProForm Archwire

Номер по каталогу	Размеры (мм)				Верхняя(В)/ Нижняя(Н)	Масса (г)	
	Глубина (D)	±Доп.	Высота (H)	±Доп.		Масса	±Доп.
109-562	0,41	0,01	0,41	0,01	В	0,13	20%
109-563	0,41	0,01	0,41	0,01	Н	0,13	20%
109-564	0,46	0,01	0,46	0,01	В	0,19	20%
109-565	0,46	0,01	0,46	0,01	Н	0,19	20%
109-568	0,56	0,01	0,41	0,01	В	0,20	20%
109-569	0,56	0,01	0,41	0,01	Н	0,20	20%
109-570	0,43	0,01	0,43	0,01	В	0,17	20%
109-571	0,43	0,01	0,43	0,01	Н	0,17	20%
109-572	0,64	0,01	0,43	0,01	В	0,23	20%
109-573	0,64	0,01	0,43	0,01	Н	0,23	20%
109-574	0,64	0,01	0,46	0,01	В	0,30	20%
109-575	0,64	0,01	0,46	0,01	Н	0,30	20%
109-576	0,64	0,01	0,48	0,01	В	0,32	20%
109-577	0,64	0,01	0,48	0,01	Н	0,32	20%
109-578	0,51	0,01	0,51	0,01	В	0,40	20%
109-579	0,51	0,01	0,51	0,01	Н	0,40	20%


11.42. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая M-Series CuNitanium 27°D-LX EZ Stops.

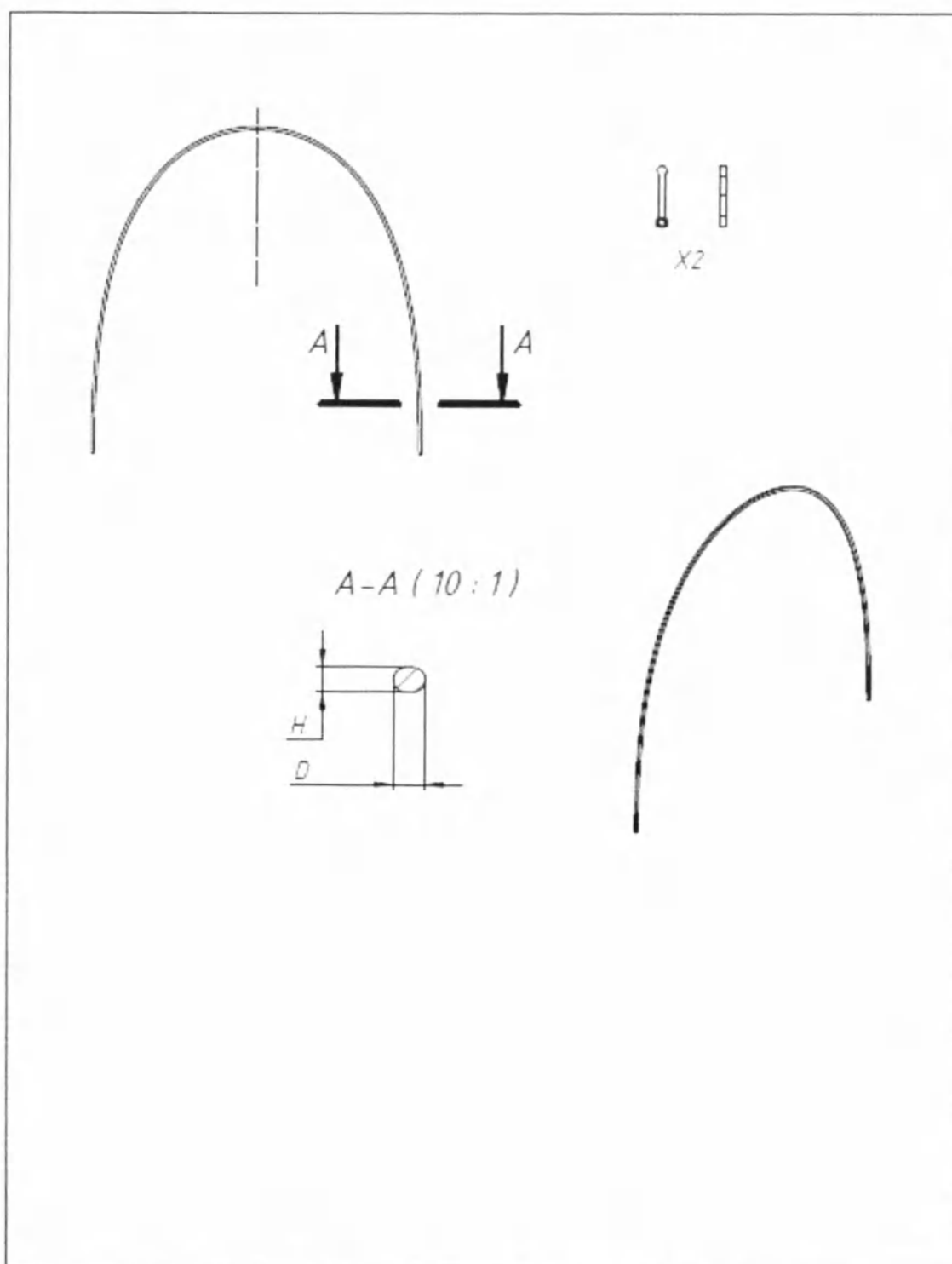

Дуги ортодонтические медь-никель-титановые
M-Series CuNitanium 27°D-LX EZ Stops

Номер по каталогу	Стандартная (С)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп	Глубина (D)	±Доп	Масса	±Доп.
103-M1	С	0,38	0,01	0,38	0,01	0,21	20%
103-M1.5	С	0,46	0,01	0,46	0,01	0,28	20%


11.43. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая M-Series CuNitanium 35°D-LX Archwire EZ Stops.

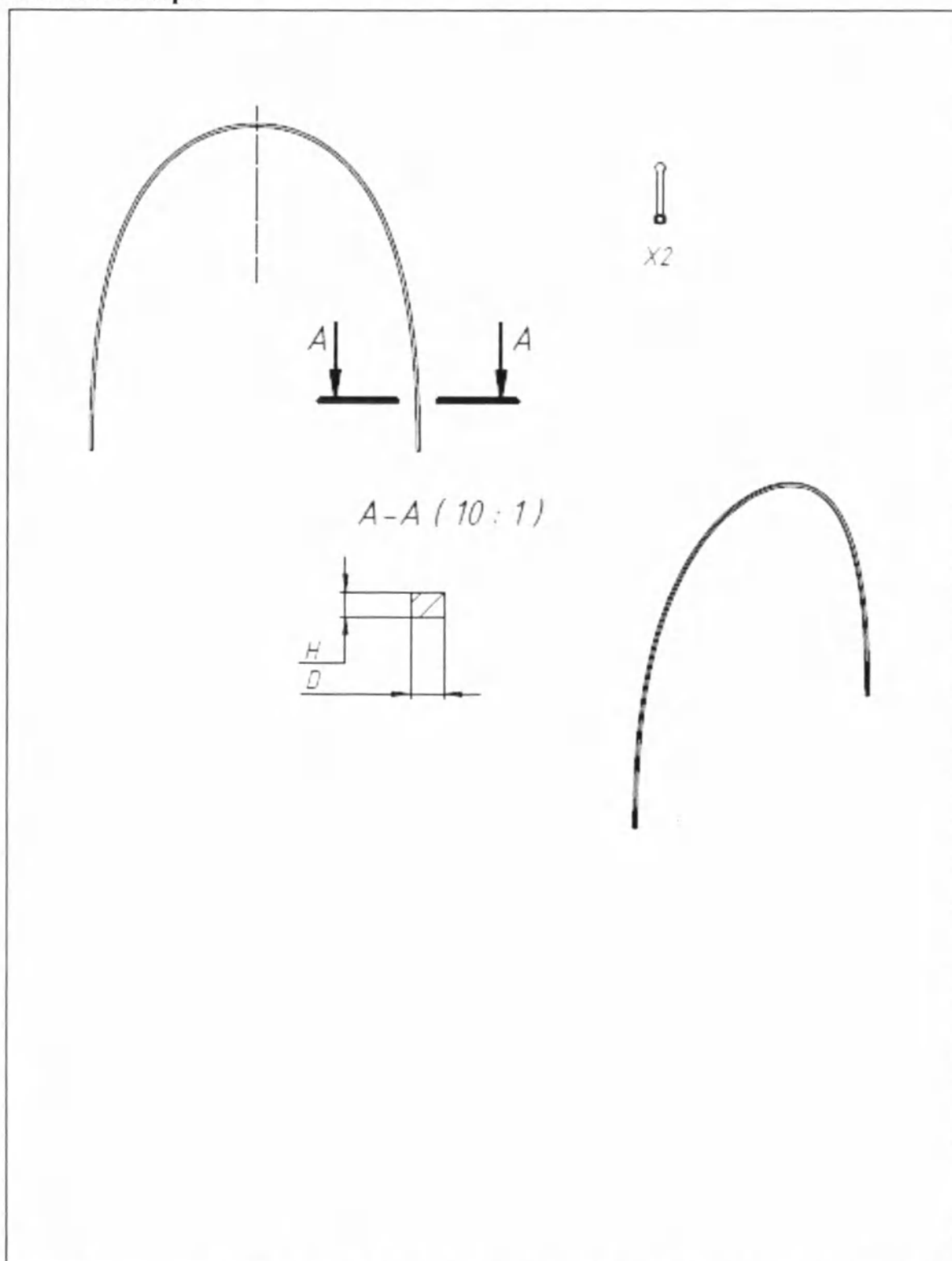

Дуги ортодонтические медь-никель-титановые
M-Series Cu Nitanium 35°D-LX EZ Stops

Номер по каталогу	Стандартная (C)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
103-M2	C	0,51	0,01	0,51	0,01	0,33	20%
103-M2.5	C	0,48	0,01	0,64	0,01	0,31	20%

11.44. Дуги ортодонтические титан-молибденовые D-LX CNA.

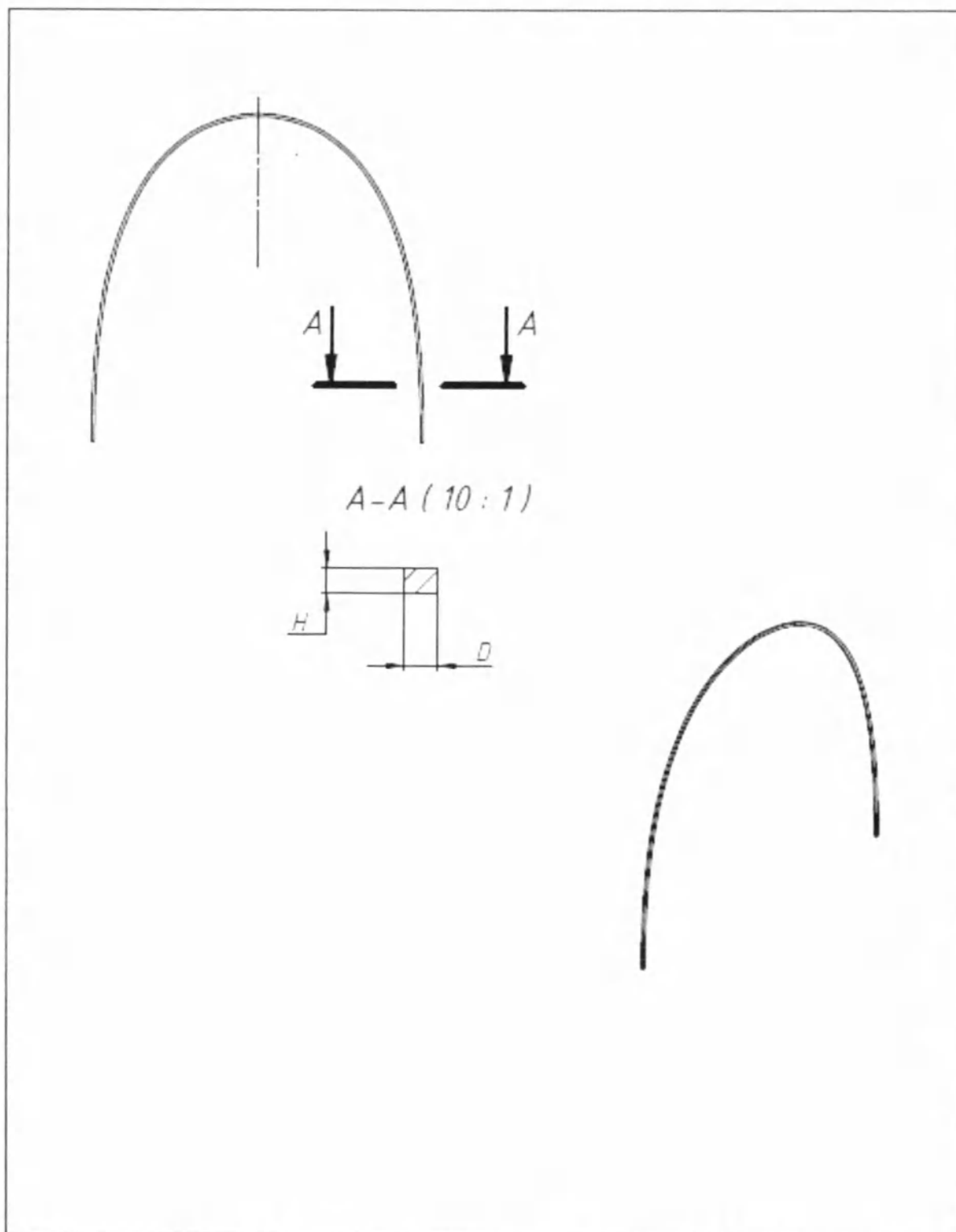

Дуги ортодонтические титан-молибденовая D-LX CNA

Номер по каталогу	Стандартная (С)	Размеры (мм)				Масса (г)	
		Высота (H)	±Доп.	Глубина (D)	±Доп.	Масса	±Доп.
103-118	С	0,41	0,01	0,64	0,01	0,18	20%
103-119	С	0,43	0,01	0,64	0,01	0,22	20%
103-120	С	0,48	0,01	0,64	0,01	0,24	20%
103-120С	С	0,48	0,01	0,64	0,01	0,24	20%

12. Стерильность.

Дуги ортодонтические, варианты исполнения, производства Орто Органайзерс, Инк., США является нестерильным продуктом.

13. Упаковка.

Дуги ортодонтические, варианты исполнения, производства Орто Органайзерс, Инк., США имеют четыре варианта упаковки.

Вариант 1.


Потребительская упаковка.

1) Первичная упаковка.

Изделия по 1 шт. помещают в пакет, состоящий из чистой бумаги (белая, неотбеленная, крафт-бумага хирургического класса без покрытия) и пленки (полиэфирное/полипропиленовое ламинирование).

2) Вторичная упаковка.

Изделия в индивидуальных пакетах по 5 или 10 шт. помещают в коробку из картона.

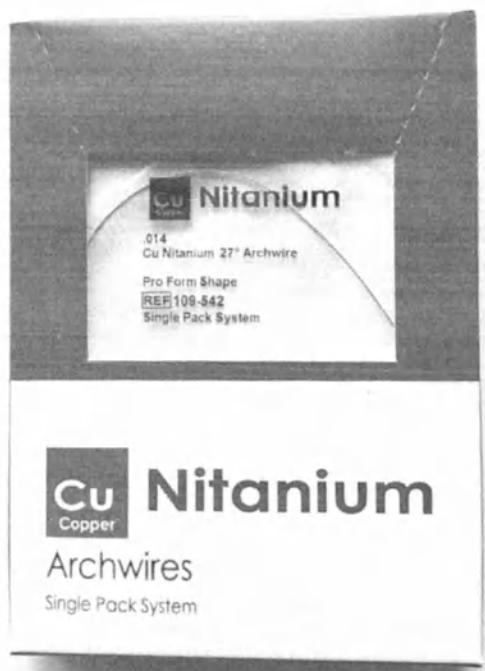


Внешний вид групповой и индивидуальной упаковки.

Вариант 2.

Потребительская упаковка.

Упаковка из твердого отбеленного сульфатного картона. Сложена в виде конверта с отрывной лентой по срединной линии передней поверхности.

Изделия по 5, 10 и 50 шт. упаковываются в данную упаковку.

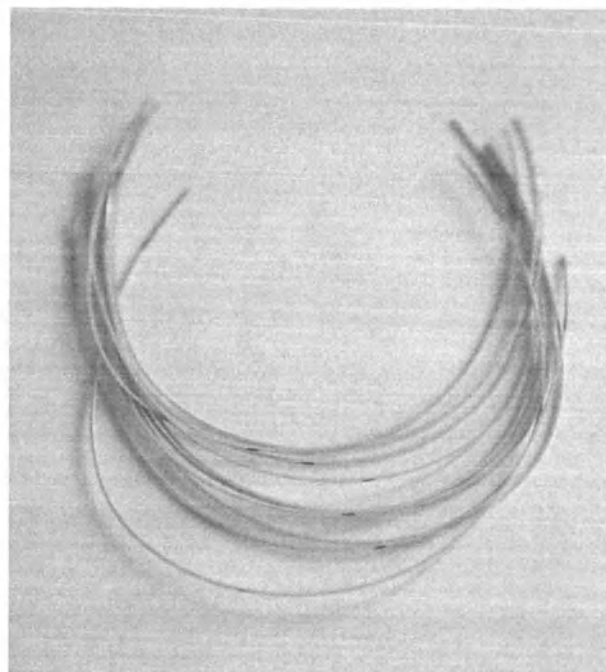


Внешний вид.

Вариант 3.


Потребительская упаковка.

Несформированные дуги упаковываются в трубки из пропионат целлюлозного пластика с красной полиэтиленовой крышкой, в количестве 5 и 20 шт.

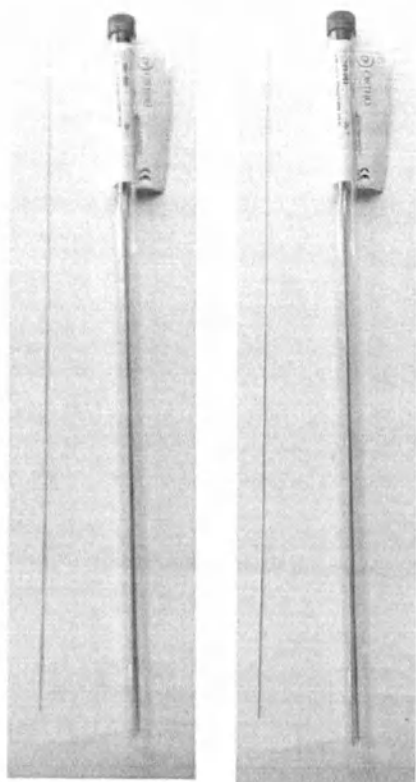

Вариант 4.

Упаковка из полиэтилена, закрывается с помощью замка по типу zip-lok.
Поставляются дуги в количестве 5 или 10 штук

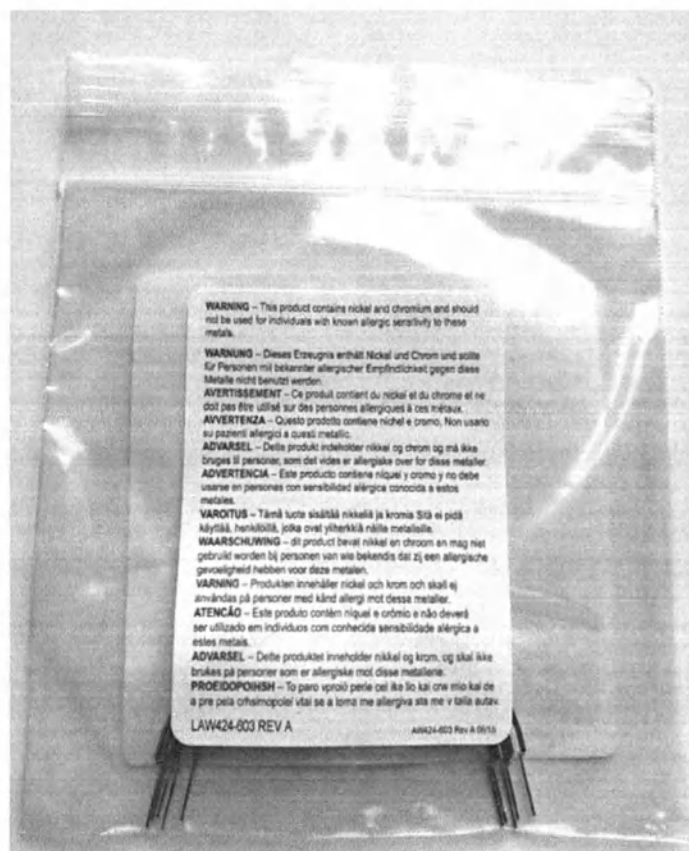



Транспортная упаковка.

Потребительские упаковки с изделиями упаковываются в картонную коробку (при необходимости используется пузырчатая пленка), которая затем заклеивается с помощью скотча.

Размеры упаковки:

Компонент упаковки	Размеры (см)
Листок-вкладыш	7,30 ±0,03 x 8,42 ±0,03
Индивидуальная упаковка (пакет)	8,89±0,15 x 11,43±0,01
Групповая упаковка (картонная коробка)	9,05±0,15 x 11,1±0,15 x 11,59±0,15

16. Маркировка.

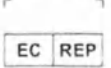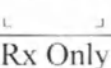	Производитель
	Европейский сертификат соответствия
	Код партии
	Номер по каталогу
	Не использовать повторно
	Смотри инструкцию по использованию
	Уполномоченный представитель в европейском сообществе
	Только для профессионального использования

17. Срок годности.

Срок годности – 10 лет.

18. Очистка и стерилизация.

Данное изделие предназначено для одноразового использования и нестерильно. Стерилизация не требуется. Эффекты от очистки и стерилизации или дезинфекции с целью повторного использования неизвестны. Физическая целостность и функционирование устройства при многократном использовании не гарантированы.

Результат многократного использования не был клинически или научно проверен, отсутствуют данные для утверждения, что данное изделие будет выполнять свои функции в соответствии с предусмотренным назначением после нескольких применений.

19. Защита окружающей среды.

Данное изделие не создает чрезмерной нагрузки на людей или окружающую среду во время использования, хранения или транспортировки. Для безопасного применения пользователь должен быть лицензированным специалистом, который знаком с методами безопасного использования данной продукции.

20. Переработка или утилизация.

Поврежденные или с истекшим сроком годности и не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов, уничтожаются как твердые бытовые отходы класса А согласно СанПиН 2.1.7.2790.

Переработка.

После использования мусор должен быть утилизирован как специальные отходы в соответствии с директивами ЕС 91/156/СЕЕ о мусоре, 94/62/СЕ об упаковке и упаковочном мусоре, а также в соответствии с местными законами об утилизации.

21. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие медицинского изделия техническим характеристикам, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

22. Требования к техническому обслуживанию и ремонту.

Изделие обслуживанию и техническому ремонту не подлежит.

Организация, принимающая на территории Российской Федерации претензии от потребителя по качеству продукта.

Общество с ограниченной ответственностью «Эстелиор» (ООО «Эстелиор»)
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, 1/8, литера А, пом. 45Н,
тел.: +7 (812) 610-05-67, e-mail: aestelior@yandex.ru.

Перевод с английского на русский язык

Утверждаю

/подпись/

Ширли Стенли

Директор, Международные продажи

Орто Органайзерс, Инк.

«02» сентября 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Корректор прикуса Carriere MOTION 3D (Carriere MOTION 3D Orthodontic appliance),
варианты исполнения

ПРОИЗВОДСТВА

Орто Органайзерс, Инк., США.

Содержание на русском языке.

Государственный нотариус или иное должностное лицо, заполняющее данное подтверждение, проверяет исключительно личность физического лица, подписавшего документ, к которому прилагается подтверждение, но не истинность, точность или действительность указанного документа.

Штат Калифорния
Округ Сан-Диего

3-е сентября 2019 года меня, Раине Андерсон, государственного Нотариуса, лично посетила Ширли Стенли подтвердившая мне на основании достаточных свидетельств, что она является лицом, чья подпись проставлена на указанном документе, и подтвердившая мне, что она подписала указанный документ на основании имеющихся у нее полномочий; и что своей подписью на документе физическое лицо, или юридическое лицо, от имени которого выступает физическое лицо, оформило указанный документ.

Я подтверждаю, с учётом ответственности за предоставление заведомо ложных сведений согласно законодательству Штата Калифорния, что изложенный выше параграф является верным и точным.

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО моей подписью и официальной печатью.

Подпись /подпись/

Штамп: Раине Андерсон
Лицензия № 2125834
Государственный Нотариус – Калифорния
Округ – Сан-Диего
Полномочия истекают 1 октября 2019 года

*Перевод с английского и немецкого языков на русский язык выполнен переводчиком
Егоровой Алиной Алексеевной*

Перевод с английского на русский язык

Утверждаю

/подпись/

Ширли Стенли

Директор, Международные продажи

Орто Органайзерс, Инк.

«02» сентября 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дуги ортодонтические, варианты исполнения

ПРОИЗВОДСТВА

Орто Органайзерс, Инк., США.

Содержание на русском языке.

Государственный нотариус или иное должностное лицо, заполняющее данное подтверждение, проверяет исключительно личность физического лица, подписавшего документ, к которому прилагается подтверждение, но не истинность, точность или действительность указанного документа.

Штат Калифорния
Округ Сан-Диего

3-е сентября 2019 года меня, Раине Андерсон, государственного Нотариуса, лично посетила Ширли Стенли подтвердившая мне на основании достаточных свидетельств, что она является лицом, чья подпись проставлена на указанном документе, и подтвердившая мне, что она подписала указанный документ на основании имеющихся у нее полномочий; и что своей подписью на документе физическое лицо, или юридическое лицо, от имени которого выступает физическое лицо, оформило указанный документ.

Я подтверждаю, с учётом ответственности за предоставление заведомо ложных сведений согласно законодательству Штата Калифорния, что изложенный выше параграф является верным и точным.

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО моей подписью и официальной печатью.

Подпись /подпись/

Штамп: Раине Андерсон
Лицензия № 2125834
Государственный Нотариус – Калифорния
Округ – Сан-Диего
Полномочия истекают 1 октября 2020 года

*Перевод с английского и немецкого языков на русский язык выполнен переводчиком
Егоровой Алиной Алексеевной*



Российская федерация
Город Москва.
Восемнадцатого сентября две тысячи девятнадцатого года

Я, Бурова Надежда Васильевна, нотариус города Москвы свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Егоровой Алиной Алексеевной.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 41-3141

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

Нотариус:



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 90 листов
нотариус 