

Макеты

Упаковки и этикеток

для медицинского изделия

«Канюли внутривенные стерильные с принадлежностями»
(регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10947 от 23.03.2021г.)


- **«Канюли внутривенные стерильные OneFloп, размеры G 14x45мм, G 16x45мм, G 17x45мм, G 18x45мм, G 20x32мм, G 22x25мм, G 24x19мм, G 26x19мм»**
- **«Канюли внутривенные стерильные SoftCathe, размеры G 14x45мм, G 16x45мм, G 17x45мм, G 18x45мм, G 20x32мм, G 22x25мм, G 24x19мм, G 26x19мм»**

Производитель: iLife Medical Devices Pvt. Ltd., India
«айЛайф Медикал Дивайсиз Пвт. Лтд.», Индия

Top

OneFlon IVC Duplex Box (Russia)

Five Colors of Printing
 Pantone 122 C
 Pantone 354 C
 Pantone 300 C
 Pantone 485 C
 Pantone Process Black U
 Size : 170X135X150mm

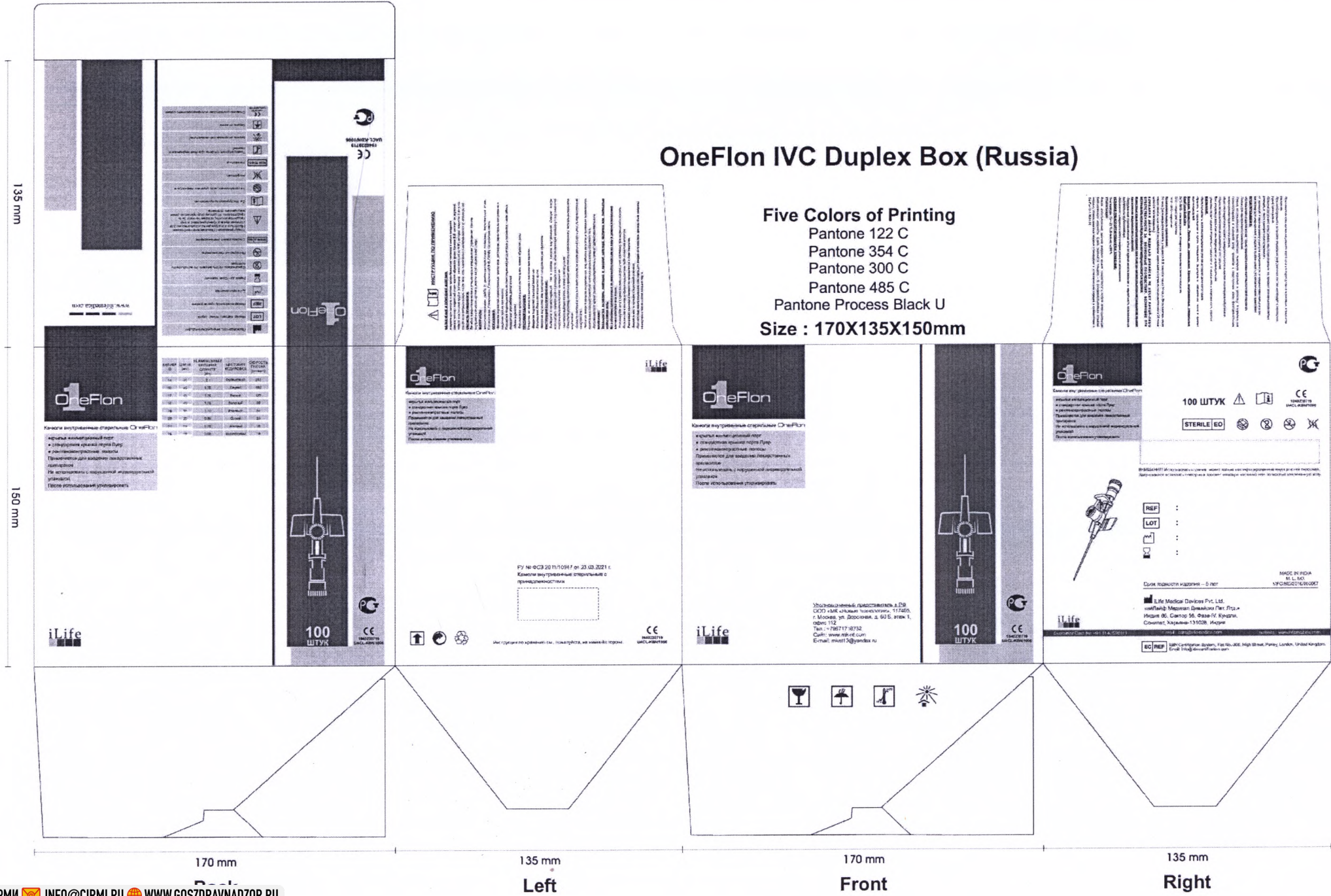

170 mm

135 mm

170 mm

135 mm

Left

Front

Right



Канюли внутривенные стерильные OneFlon

- крылья • инъекционный порт
- стандартная крышка порта Луер
- рентгеноконтрастные полосы

Применяется для введения лекарственных препаратов

Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковкой

После использования утилизировать

КАЛИБР G	ДЛИНА (мм)	НОМИНАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (мм)	ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА	СКОРОСТЬ ПОТОКА (мл/мин)
14	45	2.1 ✓	Оранжевый	270 ✓
16	45	1.70 ✓	Серый	180 ✓
17	45	1.50 ✓	Белый	125 ✓
18	45	1.30 ✓	Зеленый	80
20	32	1.10 ✓	Розовый	54
22	25	0.90 ✓	Синий	33
24	19	0.70 ✓	Желтый	20
26	19	0.60 ✓	Фиолетовый	19



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Канюли внутривенные стерильные OneFlon

- крылья • инъекционный порт • стандартная крышка порта Луер
- рентгеноконтрастные полосы

Применяется для введения лекарственных препаратов

Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковкой

После использования утилизировать

ПУ № ФСЗ 2011/10947 от 23.03.2021



ISO
10555-5

STERILE

EO



NON TOXIC

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

MADE IN INDIA | M. L. NO. MFG/MD/2018/000087

1 штука.



1940230719

UACL-KBN/1006



iLife Medical Devices Pvt. Ltd.
«айЛайф Медикал Дивайсиз Pvt. Лтд.»
Индия 86, Сектор 56, Фаза-IV, Кундли,
Сонипат, Харьяна-131028, Индия



Арт №. 901.01.08

0.60X19MM

26G

Скорость потока
19мл/мин

Лот Партия №:

Произв. :

Годен до :

OneFlon IVC Blister Design (Russia)

Blister Size: 134x27 mm
Colour: Pantone 355C | Green

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Канюли внутривенные стерильные OneFlon

- крышка инъекционный порт стандартная крышка порта Луер
- рентгеноконтрастные полосы

Применяется для введения лекарственных препаратов

Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковки

После использования утилизировать

ПУ № ФСЗ 2011/10947 от 23.03.2021

NON TOXIC

ISO 10555-5

STERILE EO

MADE IN INDIA | M. L. NO. MFG/MD/2018/000087

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

1 штука.

CE

1940230719

UACL-KBN/1006

iLife Medical Devices Pvt. Ltd.

«айЛиф Медикал Дивайсиз Пвт. Лтд.»

Индия 86, Сектор 56, Фазз-IV, Кундли, Сонипат, Харьяна-131028, Индия

0.60X19mm

26G

Скорость потока 26мл/мин

Партыя № :

Прочие :

Годы до :

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Канюли внутривенные стерильные OneFlon

- крышка инъекционный порт стандартная крышка порта Луер
- рентгеноконтрастные полосы

Применяется для введения лекарственных препаратов

Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковки

После использования утилизировать

ПУ № ФСЗ 2011/10947 от 23.03.2021

NON TOXIC

ISO 10555-5

STERILE EO

MADE IN INDIA | M. L. NO. MFG/MD/2018/000087

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

1 штука.

CE

1940230719

UACL-KBN/1006

iLife Medical Devices Pvt. Ltd.

«айЛиф Медикал Дивайсиз Пвт. Лтд.»

Индия 86, Сектор 56, Фазз-IV, Кундли, Сонипат, Харьяна-131028, Индия

0.70X19mm

24G

Скорость потока 24мл/мин

Партыя № :

Прочие :

Годы до :

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Канюли внутривенные стерильные OneFlon

- крышка инъекционный порт стандартная крышка порта Луер
- рентгеноконтрастные полосы

Применяется для введения лекарственных препаратов

Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковки

После использования утилизировать

ПУ № ФСЗ 2011/10947 от 23.03.2021

NON TOXIC

ISO 10555-5

STERILE EO

MADE IN INDIA | M. L. NO. MFG/MD/2018/000087

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

1 штука.

CE

1940230719

UACL-KBN/1006

iLife Medical Devices Pvt. Ltd.

«айЛиф Медикал Дивайсиз Пвт. Лтд.»

Индия 86, Сектор 56, Фазз-IV, Кундли, Сонипат, Харьяна-131028, Индия

0.90X25mm

22G

Скорость потока 22мл/мин

Партыя № :

Прочие :

Годы до :

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Канюли внутривенные стерильные OneFlon

- крышка инъекционный порт стандартная крышка порта Луер
- рентгеноконтрастные полосы

Применяется для введения лекарственных препаратов

Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковки

После использования утилизировать

ПУ № ФСЗ 2011/10947 от 23.03.2021

NON TOXIC

ISO 10555-5

STERILE EO

MADE IN INDIA | M. L. NO. MFG/MD/2018/000087

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

1 штука.

CE

1940230719

UACL-KBN/1006

iLife Medical Devices Pvt. Ltd.

«айЛиф Медикал Дивайсиз Пвт. Лтд.»

Индия 86, Сектор 56, Фазз-IV, Кундли, Сонипат, Харьяна-131028, Индия

1.10X32mm

20G

Скорость потока 20мл/мин

Партыя № :

Прочие :

Годы до :

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Канюли внутривенные стерильные OneFlon

- крышка инъекционный порт стандартная крышка порта Луер
- рентгеноконтрастные полосы

Применяется для введения лекарственных препаратов

Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковки

После использования утилизировать

ПУ № ФСЗ 2011/10947 от 23.03.2021

NON TOXIC

ISO 10555-5

STERILE EO

MADE IN INDIA | M. L. NO. MFG/MD/2018/000087

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

1 штука.

CE

1940230719

UACL-KBN/1006

iLife Medical Devices Pvt. Ltd.

«айЛиф Медикал Дивайсиз Пвт. Лтд.»

Индия 86, Сектор 56, Фазз-IV, Кундли, Сонипат, Харьяна-131028, Индия

1.30X45mm

18G

Скорость потока 18мл/мин

Партыя № :

Прочие :

Годы до :

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Канюли внутривенные стерильные OneFlon

- крышка инъекционный порт стандартная крышка порта Луер
- рентгеноконтрастные полосы

Применяется для введения лекарственных препаратов

Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковки

После использования утилизировать

ПУ № ФСЗ 2011/10947 от 23.03.2021

NON TOXIC

ISO 10555-5

STERILE EO

MADE IN INDIA | M. L. NO. MFG/MD/2018/000087

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

1 штука.

CE

1940230719

UACL-KBN/1006

iLife Medical Devices Pvt. Ltd.

«айЛиф Медикал Дивайсиз Пвт. Лтд.»

Индия 86, Сектор 56, Фазз-IV, Кундли, Сонипат, Харьяна-131028, Индия

1.50X45mm

17G

Скорость потока 17мл/мин

Партыя № :

Прочие :

Годы до :

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Канюли внутривенные стерильные OneFlon

- крышка инъекционный порт стандартная крышка порта Луер
- рентгеноконтрастные полосы

Применяется для введения лекарственных препаратов

Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковки

После использования утилизировать

ПУ № ФСЗ 2011/10947 от 23.03.2021

NON TOXIC

ISO 10555-5

STERILE EO

MADE IN INDIA | M. L. NO. MFG/MD/2018/000087

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

1 штука.

CE

1940230719

UACL-KBN/1006

iLife Medical Devices Pvt. Ltd.

«айЛиф Медикал Дивайсиз Пвт. Лтд.»

Индия 86, Сектор 56, Фазз-IV, Кундли, Сонипат, Харьяна-131028, Индия

1.70X45mm

16G

Скорость потока 16мл/мин

Партыя № :

Прочие :

Годы до :

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Канюли внутривенные стерильные OneFlon

- крышка инъекционный порт стандартная крышка порта Луер
- рентгеноконтрастные полосы

Применяется для введения лекарственных препаратов

Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковки

После использования утилизировать

ПУ № ФСЗ 2011/10947 от 23.03.2021

NON TOXIC

ISO 10555-5

STERILE EO

MADE IN INDIA | M. L. NO. MFG/MD/2018/000087

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

1 штука.

CE

1940230719

UACL-KBN/1006

iLife Medical Devices Pvt. Ltd.

«айЛиф Медикал Дивайсиз Пвт. Лтд.»

Индия 86, Сектор 56, Фазз-IV, Кундли, Сонипат, Харьяна-131028, Индия

2.1X45mm

14G

Скорость потока 14мл/мин

Партыя № :

Прочие :

Годы до :



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Изделие для доступа к системе кровообращения человека с целью введения лекарственных жидкостей и/или взятия образцов крови. Канюля В.В. состоит из короткой гибкой пластиковой трубки (катетера), изготовленной из ФЭП, которая вводится в вену на полую иглу-интродьюсер, после чего игла извлекается и выбрасывается (утилизируется).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Лечебно-профилактические и стационарные медицинские учреждения. Канюли внутривенные используются в асептической окружающей среде.

МАТЕРИАЛЫ:

Фторэтиленпропилен (ФЭП) (с рентгеноконтрастными полосами), Нержавеющая сталь, Полипропилен, Полиэтилен, Полиэтилен (ПЭНД, ПЭВД), Силиконовая смола.

ПОКАЗАНИЯ:

-Вливание жидкостей: лекарственных препаратов, растворов, парентерального питания и введение прочих препаратов.

Поддержка гидратации и/или соответствующей дегидратации у пациентов, неспособных перорально употребить достаточный

-объем жидкостей.

-Переливание крови или компонентов крови, взятие образцов крови.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Гиперчувствительность пациента к компонентам изделия.

-Введение жидкостей с высокой вязкостью

-Переливание большого количества крови

-Введение жидкостей или препаратов с раздражающим эффектом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

-Выберите соответствующий тип и размер канюли внутривенной. Следует всегда использовать наименьший из размеров канюли, обеспечивающий адекватную внутривенную инфузию желаемого количества жидкостей.

-Тщательно выберите и очистите место венопункции.

-Осмотрите упаковку канюли на предмет целостности и срока годности, затем выньте канюлю из упаковки.

-Снимите колпачок иглы и возьмите канюлю за инъекционный порт и упор, предусмотренный на муфте иглы.

-Частично введите канюлю внутривенную под небольшим углом и проверьте правильность прокола вены посредством обратного тока крови в камеру обратного тока.

-Продвиньте катетер внутрь вены и одновременно с этим осторожно извлеките иглу.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

Во избежание кровотечения не нажимайте пальцем на вену в районе нахождения кончика катетера или выше.

-Утилизируйте иглу в предназначенный для этого контейнер для медицинских отходов.

-Подключите к канюле инфузионную систему либо навинтите колпачок.

-Расправьте крылышки канюли по направлению к коже пациента.

-Закройте место пункции стерильной повязкой.

-При использовании инъекционного порта для введения препараты должны быть введены немедленно после снятия крышки порта.

-При неиспользовании инъекционного порта крышка порта должна оставаться в закрытом состоянии.

-При необходимости установки нескольких инфузионных систем используйте переходник (кран) трехходовой.

-Следует регулярно осматривать место венопункции на предмет возникновения любых реакций, а также проверять все соединения.

-Утилизируйте использованную канюлю внутривенную в предназначенный для этого контейнер для медицинских отходов в соответствии с установленными правилами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

-Использовать изделие может только квалифицированный медицинский персонал.

-Только для однократового применения.

-Перед использованием внимательно осмотрите изделие и упаковку. Неправильная транспортировка и хранение могут привести к структурным и/или функциональным повреждениям изделия или упаковки.

-Изделие следует использовать немедленно после вскрытия индивидуальной упаковки.

-Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

При отсутствии вскрытия или повреждения индивидуальной

упаковки гарантируется отсутствие токсичности, стерильность и апиrogenность изделия.

ВНИМАНИЕ:

-Не использовать, если индивидуальная упаковка повреждена или открыта.

-Хранить в прохладном и сухом помещении. Защищать от избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

Целевая Возрастная Группа для применения Канюль внутривенных стерильных OneFlon и SoftCath

24 G -26 G – новорожденные, младенцы, пациенты пожилого возраста

22 G – педиатрия, взрослые

14 G – 20 G – взрослые

Продолжительность применения:

24 часа (рекомендуется извлечь у пациента В.В. канюлю через 24 часа. Пользователь несет ответственность за любой тип проблемы, возникший в случае использования после 24 часов одного и того же изделия.)

КОМПАНИЯ АЙЛАЙФ МЕДИКАЛ ДИВАЙСИЗ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Известные характеристики изделия при повторном использовании (нарушение правил применения медицинского изделия):

-Затрудненное проникновение иглы во время использования и вероятность возникновения деформации трубки катетера.

-Возможность переноса любого инфекционного заболевания.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ:

Температура: 10 – 25 °C, Влажность: 60 %


УТИЛИЗАЦИЯ:

После использования данное изделие может представлять собой потенциальную биологическую опасность. Класс опасности отходов – Б (эпидемиологически опасные отходы). Использованные изделия утилизируют в установленном порядке в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Softcathe IVC Duplex For Russia

Top


135 mm

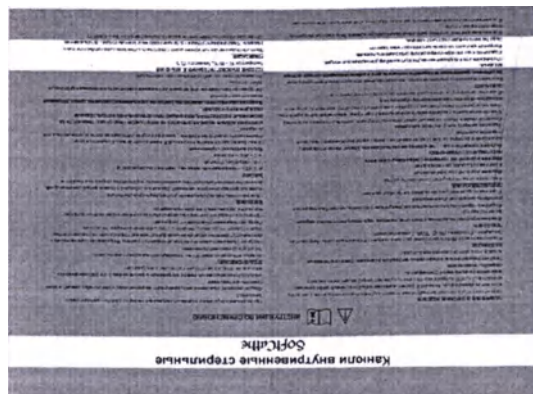

Параметры	Значения
Длина, мм	170
Высота, мм	135
Глубина, мм	150
Материал	ПВХ
Срок годности	3 года
Условия хранения	При температуре от +5 до +25 °С
Способ утилизации	В соответствии с требованиями законодательства
Сертификация	CE, ISO 13485
Производитель	ООО ЦИРМИ
Адрес	125080, г. Москва, ул. Даровская, д. 60, стр. 1, офис 102
Телефон	+7 (495) 707-1004
Факс	+7 (495) 707-1005
Электронная почта	info@cirmi.ru
Сайт	www.goszdravnadzor.ru

Six Colors of Printing

Pantone 7441 C
Pantone 122 C
Pantone 354 C
Pantone 300 C
Pantone 485 C
Black

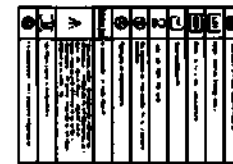


Size : 170X135X150mm

150 mm

Канюли внутривенные стерильные SoftCathe

- крышка перфорированная • инъекционный порт
 - отслаивающаяся крышка порта Луер
 - рентгеноконтрастные логосы
- Применяется для введения лекарственных препаратов. Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковки. После использования утилизировать.

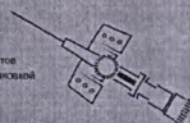


Канюли внутривенные стерильные SoftCathe

- крышка перфорированная • инъекционный порт
 - отслаивающаяся крышка порта Луер
 - рентгеноконтрастные логосы
- Применяется для введения лекарственных препаратов. Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковки. После использования утилизировать.



Изготовитель, производитель, д. пр.
ООО АИВ «Ивмаш» (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц)
д. 60, стр. 1, офис 102

Канюли внутривенные стерильные SoftCathe

- крышка перфорированная • инъекционный порт
 - отслаивающаяся крышка порта Луер
 - рентгеноконтрастные логосы
- Применяется для введения лекарственных препаратов. Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковки. После использования утилизировать.

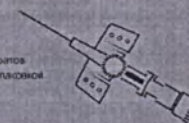

Канюли внутривенные стерильные SoftCathe

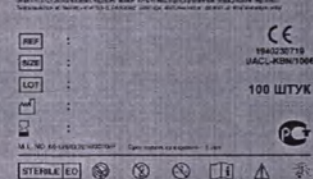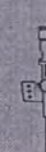

iLife

100 ШТУК

CE 1940230719 UACI-KBM1906

iLife



CE 1940230719 UACI-KBM1906

iLife

100 ШТУК

CE 1940230719 UACI-KBM1906

Производитель: ООО «Ивмаш» (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц)
д. 60, стр. 1, офис 102

ISO 13485:2015

170 mm

Back

135 mm

Left

170 mm

Front

135 mm

Right

Канюли внутривенные стерильные SoftCath®

КАЛИБР G	ДЛИНА (мм)	НОМИНАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (мм)	ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА	СКОРОСТЬ ПОТОКА (мл/мин)
14	45	2.1	Оранжевый	270
16	45	1.70	Серый	180
17	45	1.50	Белый	125
18	45	1.30	Зеленый	80
20	32	1.10	Розовый	54
22	25	0.90	Синий	33
24	19	0.70	Желтый	20
26	19	0.60	Фиолетовый	19

	Апирогенно
	Температурные пределы хранения медицинских изделий
	Беречь от прямых солнечных лучей
	Беречь от влаги
EC REP	Уполномоченный представитель в ЕС
CE 1940230719 UACL-KBN1006	Символы соответствия нотифицированного органа
NON TOXIC	Нетоксично

Канюли внутривенные стерильные SoftCath®

- крылья перфорированные инъекционный порт
- отщелкивающаяся крышка порта Луер
- рентгеноконтрастные полосы

Применяется для введения лекарственных препаратов

Не использовать с нарушенной индивидуальной упаковкой

После использования утилизировать



РУ № ФСЗ 2011/10947 от 23.03.2021

ISO
10555-6

STERILE EO



NON TOXIC

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

MADE IN INDIA | M. L. NO. MFG/MD/2018/000067

1 штука.



1940230719
UACL-KBN/1006



ILife Medical Devices Pvt. Ltd.
«айЛайф Медицинские Девайсы Лтд.»
Индия 86, Сектор 86, Фаза-IV, Кундли,
Сонипат, Харьяна-131028, Индия



(01)08906039100167

Арт №. 901.02.08

0.60X19MM

26G

Скорость потока
19 мл/мин

LOT Партия №:


Произв. :

Годен до :



•

Канюли внутривенные стерильные SoftCath

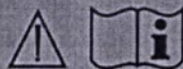

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Изделие для доступа к системе кровообращения человека с целью введения лекарственных жидкостей и/или взятия образцов крови. Канюля В.В. состоит из короткой гибкой пластиковой трубки (катетера), изготовленной из ФЭП, которая вводится в вену на полой игле-интродьюсере, после чего игла извлекается и выбрасывается (утилизируется).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Лечебно-профилактические и стационарные медицинские учреждения. Канюли внутривенные используются в асептической окружающей среде.

МАТЕРИАЛЫ:

Фторэтиленпропилен (ФЭП) (с рентгеноконтрастными полосами), Нержавеющая сталь, Полипропилен, Полиэтилен, Полиэтилен (ПЭНД, ПЭВД), Силиконовая смола.

ПОКАЗАНИЯ:

-Вливание жидкостей: лекарственных препаратов, растворов, парентерального питания и введение прочих препаратов.

-Поддержка гидратации и/или соответствующей дегидратации у пациентов, неспособных перорально употребить достаточный объем жидкостей.

-Переливание крови или компонентов крови, взятие образцов крови.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

-Гиперчувствительность пациента к компонентам изделия.

-Введение жидкостей с высокой вязкостью

-Переливание большого количества крови

-Введение жидкостей или препаратов с раздражающим эффектом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

-Выберите соответствующий тип и размер канюли внутривенной. Следует всегда использовать наименьший из размеров канюли, обеспечивающий адекватную внутривенную инфузию желаемого количества жидкостей.

-Тщательно выберите и очистите место венопункции.

-Осмотрите упаковку канюли на предмет целостности и срока годности, затем выньте канюлю из упаковки.

-Снимите колпачок иглы и возьмите канюлю за инъекционный порт и упор, предусмотренный на муфте иглы.

-Частично введите канюлю внутривенную под небольшим углом и проверьте правильность прокола вены посредством обратного тока крови в камеру обратного тока.

-Продвиньте катетер внутри вены и одновременно с этим осторожно извлеките иглу.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается вставлять повторно в просвет катетера частично или полностью извлеченную иглу.

Во избежание кровотечения не нажимайте пальцем на вену в районе нахождения кончика катетера или выше.

-Утилизируйте иглу в предназначенный для этого контейнер для медицинских отходов.

-Подключите к канюле инфузионную систему либо навешивайте колпачок.

-Расправьте крылышки канюли по направлению к коже пациента.

-Закройте место пункции стерильной повязкой.

-При использовании инъекционного порта для введения препараты должны быть введены немедленно после снятия крышки порта.

После использования крышка порта должна оставаться в закрытом состоянии.

-При необходимости установки нескольких инфузионных систем используйте переходник (кран) трехходовой.

-Следует регулярно осматривать место венопункции на предмет возникновения любых реакций, а также проверять все соединения.

-Утилизируйте использованную канюлю внутривенную в предназначенный для этого контейнер для медицинских отходов в соответствии с установленными правилами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

-Использовать изделие может только квалифицированный медицинский персонал.

-Только для одноразового применения.

-Перед использованием внимательно осмотрите изделие и упаковку. Неправильная транспортировка и хранение могут привести к структурным и/или функциональным повреждениям изделия или упаковки.

-Изделие следует использовать немедленно после вскрытия индивидуальной упаковки.

-Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

-При отсутствии вскрытия или повреждения индивидуальной упаковки гарантируется отсутствие токсичности, стерильность и апиrogenность изделия.

ВНИМАНИЕ:

-Не использовать, если индивидуальная упаковка повреждена или открыта.

-Хранить в прохладном и сухом помещении. Защищать от избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

Целевая Возрастная Группа для применения Канюль внутривенных стерильных OneFlo и

SoftCath

24 G - 26 G – новорожденные, младенцы, пациенты пожилого возраста

22 G – педиатрия, взрослые

14 G – 20 G – взрослые

Продолжительность применения:

24 часа (рекомендуется извлечь у пациента В.В. канюлю через 24 часа. Пользователь несет ответственность за любой тип проблемы, возникший в случае использования после 24 часов одного и того же изделия.)

КОМПАНИЯ АЙЛАЙФ МЕДИКАЛ ДИВАЙСИЗ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Известные характеристики изделия при повторном использовании (нарушение правил применения медицинского изделия):

-Затрудненное проникновение иглы во время использования и вероятность возникновения деформации трубки катетера.

-Возможность переноса любого инфекционного заболевания.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ:

Температура: 10 – 25 °C, Влажность: 60 %

УТИЛИЗАЦИЯ:

После использования данное изделие может представлять собой потенциальную биологическую опасность. Класс опасности отходов – Б (эпидемиологически опасные отходы). Использованные изделия утилизируют в установленном порядке в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Фрунзе 11.07.2014

