

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Альмида»



Д.А. Дубровин

2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

об изменении

Обувь ортопедическая малосложная
по ТУ 32.50.22-001-33010841-2019

Руководство по эксплуатации (РЭ)

Выпуск 2

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № подл.	Подп. и дата

ООО «Альмида»		Извещение №1	Обозначение Руководство по эксплуатации (РЭ)		
Дата выпуска	Срок изм.			Лист 2	Листов 2
Причина	Устранение ошибок				Код 4
Указание о заделе	Не отражается				
Указание о внедрении	С момента регистрации				
Применяемость	ТУ 32.50.22-001-33010841-2019. Руководство по эксплуатации(РЭ)				
Разослать	Не требуется				
Приложения	14 листа				
Изм.	Содержание изменения				
1					

Лист 1

Изменение вносится заменой листа

- 1) Заменить лист «1» на лист «1» по Извещению №1.

Листы 4 – 11

Изменение вносится заменой листа

- 1) Заменить листы «4 – 11» на листы «4 – 11» по Извещению №1.

Листы 12

Изменение вносится удалением листа

Листы 13 – 16

Изменение вносится заменой листа

- 1) Заменить листы «13 – 16» на листы «12 – 15» по Извещению №1.

Листы 17 – 26

Изменение вносится закрашиванием белым цветом

- 1) Заменить нумерацию листов «17- 26» на листы «16 – 25».

Листы 27



Изменение вносится заменой листа

- 1) Заменить листы «27» на листы «26» по Извещению №1.

Листы 17 – 26

Изменение вносится закрашиванием белым цветом

- 1) Заменить нумерацию листов «28 - 31» на листы «27 - 30».

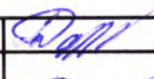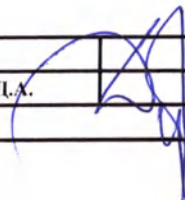Составил	Тарновицкая Т.С.		Проверил		
Проверил			Утвердил	Дубровин Д.А.	
Изменения ввёл Тарновицкая Т.С. 					

Общество с ограниченной ответственностью «Альмида»
(ООО «Альмида»)

32.50.22.150

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Альмида»

_____ Д.А. Дубровин
« ____ » _____ 2020 г.

**Обувь ортопедическая малосложная
по ТУ 32.50.22-001-33010841-2019**

Руководство по эксплуатации (РЭ)

Выпуск 2

Срок сохраняемости обуви - не более шести месяцев, для детей инвалидов - не более одного месяца.

Обувь ремонтпригодна в течение срока службы.

Критериями непригодности обуви к носке являются деформация или нарушение целостности специальных деталей, указанных в п.2.3 настоящего руководства. Специальные детали обуви ремонту не подлежат.

4.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номенклатура (модели) обуви и её размеры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Половозрастная группа/размеры,мм.(см)									
Обувь малолетская с деформациями и дефектами стоп (МД/125(20) – 165(26)									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки малолетские (09Б)									
09Б- МД-К0	09Б- МД-Т0			09Б-МД- КТ0					
09Б- МД-К1	09Б- МД-Т1	09Б- МД-И1	09Б- МД-С1	09Б-МД- КТ1	09Б-МД- КИ1	09Б-МД- КС1	09Б-МД- ИТ1	09Б-МД- СТ1	09Б-МД- ИС1
09Б- МД-К2	09Б- МД-Т2	09Б- МД-И2	09Б- МД-С2	09Б-МД- КТ2	09Б-МД- КИ2	09Б-МД- КС2	09Б-МД- ИТ2	09Б-МД- СТ2	09Б-МД- ИС2
09Б- МД-К3	09Б- МД-Т3	09Б- МД-И3	09Б- МД-С3	09Б-МД- КТ3	09Б-МД- КИ3	09Б-МД- КС3	09Б-МД- ИТ3	09Б-МД- СТ3	09Б-МД- ИС3
09Б- МД-К4	09Б- МД-Т4	09Б- МД-И4	09Б- МД-С4	09Б-МД- КТ4	09Б-МД- КИ4	09Б-МД- КС4	09Б-МД- ИТ4	09Б-МД- СТ4	09Б-МД- ИС4
09Б- МД-К5	09Б- МД-Т5	09Б- МД-И5	09Б- МД-С5	09Б-МД- КТ5	09Б-МД- КИ5	09Б-МД- КС5	09Б-МД- ИТ5	09Б-МД- СТ5	09Б-МД- ИС5
Сапоги малолетские (09С)									
09С- МД-К0	09С- МД-Т0			09С-МД- КТ0					
09С- МД-К1	09С- МД-Т1	09С- МД-И1	09С- МД-С1	09С-МД- КТ1	09С-МД- КИ1	09С-МД- КС1	09С-МД- ИТ1	09С-МД- СТ1	09С-МД- ИС1
09С- МД-К2	09С- МД-Т2	09С- МД-И2	09С- МД-С2	09С-МД- КТ2	09С-МД- КИ2	09С-МД- КС2	09С-МД- ИТ2	09С-МД- СТ2	09С-МД- ИС2
09С- МД-К3	09С- МД-Т3	09С- МД-И3	09С- МД-С3	09С-МД- КТ3	09С-МД- КИ3	09С-МД- КС3	09С-МД- ИТ3	09С-МД- СТ3	09С-МД- ИС3
09С- МД-К4	09С- МД-Т4	09С- МД-И4	09С- МД-С4	09С-МД- КТ4	09С-МД- КИ4	09С-МД- КС4	09С-МД- ИТ4	09С-МД- СТ4	09С-МД- ИС4
09С- МД-К5	09С- МД-Т5	09С- МД-И5	09С- МД-С5	09С-МД- КТ5	09С-МД- КИ5	09С-МД- КС5	09С-МД- ИТ5	09С-МД- СТ5	09С-МД- ИС5

Полуботинки малодетские (010ПБ))									
010ПБ-МД-К0	010ПБ-МД-Т0			010ПБ-МД-КТ0					
010ПБ-МД-К1	010ПБ-МД-Т1	010ПБ-МД-И1	010ПБ-МД-С1	010ПБ-МД-КТ1	010ПБ-МД-КИ1	010ПБ-МД-КС1	010ПБ-МД-ИТ1	010ПБ-МД-СТ1	010ПБ-МД-ИС1
010ПБ-МД-К2	010ПБ-МД-Т2	010ПБ-МД-И2	010ПБ-МД-С2	010ПБ-МД-КТ2	010ПБ-МД-КИ2	010ПБ-МД-КС2	010ПБ-МД-ИТ2	010ПБ-МД-СТ2	010ПБ-МД-ИС2
010ПБ-МД-К3	010ПБ-МД-Т3	010ПБ-МД-И3	010ПБ-МД-С3	010ПБ-МД-КТ3	010ПБ-МД-КИ3	010ПБ-МД-КС3	010ПБ-МД-ИТ3	010ПБ-МД-СТ3	010ПБ-МД-ИС3
010ПБ-МД-К4	010ПБ-МД-Т4	010ПБ-МД-И4	010ПБ-МД-С4	010ПБ-МД-КТ4	010ПБ-МД-КИ4	010ПБ-МД-КС4	010ПБ-МД-ИТ4	010ПБ-МД-СТ4	010ПБ-МД-ИС4
010ПБ-МД-К5	010ПБ-МД-Т5	010ПБ-МД-И5	010ПБ-МД-С5	010ПБ-МД-КТ5	010ПБ-МД-КИ5	010ПБ-МД-КС5	010ПБ-МД-ИТ5	010ПБ-МД-СТ5	010ПБ-МД-ИС5
Туфли малодетские (011Т)									
011Т-МД-К0	011Т-МД-Т0			011Т-МД-КТ0					
011Т-МД-К1	011Т-МД-Т1	011Т-МД-И1	011Т-МД-С1	011Т-МД-КТ1	011Т-МД-КИ1	011Т-МД-КС1	011Т-МД-ИТ1	011Т-МД-СТ1	011Т-МД-ИС1
011Т-МД-К2	011Т-МД-Т2	011Т-МД-И2	011Т-МД-С2	011Т-МД-КТ2	011Т-МД-КИ2	011Т-МД-КС2	011Т-МД-ИТ2	011Т-МД-СТ2	011Т-МД-ИС2
011Т-МД-К3	011Т-МД-Т3	011Т-МД-И3	011Т-МД-С3	011Т-МД-КТ3	011Т-МД-КИ3	011Т-МД-КС3	011Т-МД-ИТ3	011Т-МД-СТ3	011Т-МД-ИС3
011Т-МД-К4	011Т-МД-Т4	011Т-МД-И4	011Т-МД-С4	011Т-МД-КТ4	011Т-МД-КИ4	011Т-МД-КС4	011Т-МД-ИТ4	011Т-МД-СТ4	011Т-МД-ИС4
011Т-МД-К5	011Т-МД-Т5	011Т-МД-И5	011Т-МД-С5	011Т-МД-КТ5	011Т-МД-КИ5	011Т-МД-КС5	011Т-МД-ИТ5	011Т-МД-СТ5	011Т-МД-ИС5
Обувь дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШУ170(27) – 195(31))									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки дошкольные (09Б)									
09Б-ДШ-К0	09Б-ДШ-Т0			09Б-ДШ-КТ0					
09Б-ДШ-К1	09Б-ДШ-Т1	09Б-ДШ-И1	09Б-ДШ-С1	09Б-ДШ-КТ1	09Б-ДШ-КИ1	09Б-ДШ-КС1	09Б-ДШ-ИТ1	09Б-ДШ-СТ1	09Б-ДШ-ИС1
09Б-ДШ-К2	09Б-ДШ-Т2	09Б-ДШ-И2	09Б-ДШ-С2	09Б-ДШ-КТ2	09Б-ДШ-КИ2	09Б-ДШ-КС2	09Б-ДШ-ИТ2	09Б-ДШ-СТ2	09Б-ДШ-ИС2
09Б-ДШ-К3	09Б-ДШ-Т3	09Б-ДШ-И3	09Б-ДШ-С3	09Б-ДШ-КТ3	09Б-ДШ-КИ3	09Б-ДШ-КС3	09Б-ДШ-ИТ3	09Б-ДШ-СТ3	09Б-ДШ-ИС3
09Б-ДШ-К4	09Б-ДШ-Т4	09Б-ДШ-И4	09Б-ДШ-С4	09Б-ДШ-КТ4	09Б-ДШ-КИ4	09Б-ДШ-КС4	09Б-ДШ-ИТ4	09Б-ДШ-СТ4	09Б-ДШ-ИС4
09Б-ДШ-К5	09Б-ДШ-Т5	09Б-ДШ-И5	09Б-ДШ-С5	09Б-ДШ-КТ5	09Б-ДШ-КИ5	09Б-ДШ-КС5	09Б-ДШ-ИТ5	09Б-ДШ-СТ5	09Б-ДШ-ИС5

Сапоги дошкольные (09С)									
09С-ДШ-К0	09С-ДШ-Т0			09С-ДШ-КТ0					
09С-ДШ-К1	09С-ДШ-Т1	09С-ДШ-И1	09С-ДШ-С1	09С-ДШ-КТ1	09С-ДШ-КИ1	09С-ДШ-КС1	09С-ДШ-ИТ1	09С-ДШ-СТ1	09С-ДШ-ИС1
09С-ДШ-К2	09С-ДШ-Т2	09С-ДШ-И2	09С-ДШ-С2	09С-ДШ-КТ2	09С-ДШ-КИ2	09С-ДШ-КС2	09С-ДШ-ИТ2	09С-ДШ-СТ2	09С-ДШ-ИС2
09С-ДШ-К3	09С-ДШ-Т3	09С-ДШ-И3	09С-ДШ-С3	09С-ДШ-КТ3	09С-ДШ-КИ3	09С-ДШ-КС3	09С-ДШ-ИТ3	09С-ДШ-СТ3	09С-ДШ-ИС3
09С-ДШ-К4	09С-ДШ-Т4	09С-ДШ-И4	09С-ДШ-С4	09С-ДШ-КТ4	09С-ДШ-КИ4	09С-ДШ-КС4	09С-ДШ-ИТ4	09С-ДШ-СТ4	09С-ДШ-ИС4
09С-ДШ-К5	09С-ДШ-Т5	09С-ДШ-И5	09С-ДШ-С5	09С-ДШ-КТ5	09С-ДШ-КИ5	09С-ДШ-КС5	09С-ДШ-ИТ5	09С-ДШ-СТ5	09С-ДШ-ИС5
Полуботинки дошкольные (010ПБ)									
010ПБ-ДШ-К0	010ПБ-ДШ-Т0			010ПБ-ДШ-КТ0					
010ПБ-ДШ-К1	010ПБ-ДШ-Т1	010ПБ-ДШ-И1	010ПБ-ДШ-С1	010ПБ-ДШ-КТ1	010ПБ-ДШ-КИ1	010ПБ-ДШ-КС1	010ПБ-ДШ-ИТ1	010ПБ-ДШ-СТ1	010ПБ-ДШ-ИС1
010ПБ-ДШ-К2	010ПБ-ДШ-Т2	010ПБ-ДШ-И2	010ПБ-ДШ-С2	010ПБ-ДШ-КТ2	010ПБ-ДШ-КИ2	010ПБ-ДШ-КС2	010ПБ-ДШ-ИТ2	010ПБ-ДШ-СТ2	010ПБ-ДШ-ИС2
010ПБ-ДШ-К3	010ПБ-ДШ-Т3	010ПБ-ДШ-И3	010ПБ-ДШ-С3	010ПБ-ДШ-КТ3	010ПБ-ДШ-КИ3	010ПБ-ДШ-КС3	010ПБ-ДШ-ИТ3	010ПБ-ДШ-СТ3	010ПБ-ДШ-ИС3
010ПБ-ДШ-К4	010ПБ-ДШ-Т4	010ПБ-ДШ-И4	010ПБ-ДШ-С4	010ПБ-ДШ-КТ4	010ПБ-ДШ-КИ4	010ПБ-ДШ-КС4	010ПБ-ДШ-ИТ4	010ПБ-ДШ-СТ4	010ПБ-ДШ-ИС4
010ПБ-ДШ-К5	010ПБ-ДШ-Т5	010ПБ-ДШ-И5	010ПБ-ДШ-С5	010ПБ-ДШ-КТ5	010ПБ-ДШ-КИ5	010ПБ-ДШ-КС5	010ПБ-ДШ-ИТ5	010ПБ-ДШ-СТ5	010ПБ-ДШ-ИС5
Туфли дошкольные (011Т)									
011Т-ДШ-К0	011Т-ДШ-Т0			011Т-ДШ-КТ0					
011Т-ДШ-К1	011Т-ДШ-Т1	011Т-ДШ-И1	011Т-ДШ-С1	011Т-ДШ-КТ1	011Т-ДШ-КИ1	011Т-ДШ-КС1	011Т-ДШ-ИТ1	011Т-ДШ-СТ1	011Т-ДШ-ИС1
011Т-ДШ-К2	011Т-ДШ-Т2	011Т-ДШ-И2	011Т-ДШ-С2	011Т-ДШ-КТ2	011Т-ДШ-КИ2	011Т-ДШ-КС2	011Т-ДШ-ИТ2	011Т-ДШ-СТ2	011Т-ДШ-ИС2
011Т-ДШ-К3	011Т-ДШ-Т3	011Т-ДШ-И3	011Т-ДШ-С3	011Т-ДШ-КТ3	011Т-ДШ-КИ3	011Т-ДШ-КС3	011Т-ДШ-ИТ3	011Т-ДШ-СТ3	011Т-ДШ-ИС3
011Т-ДШ-К4	011Т-ДШ-Т4	011Т-ДШ-И4	011Т-ДШ-С4	011Т-ДШ-КТ4	011Т-ДШ-КИ4	011Т-ДШ-КС4	011Т-ДШ-ИТ4	011Т-ДШ-СТ4	011Т-ДШ-ИС4
011Т-ДШ-К5	011Т-ДШ-Т5	011Т-ДШ-И5	011Т-ДШ-С5	011Т-ДШ-КТ5	011Т-ДШ-КИ5	011Т-ДШ-КС5	011Т-ДШ-ИТ5	011Т-ДШ-СТ5	011Т-ДШ-ИС5

Обувь для школьников-девочек и школьников-мальчиков с деформациями,дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш)/205(32) – 240(37)									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки для школьников (09Б)									
09Б-Ш-К0	09Б-Ш-Т0	09Б-Ш-И0	09Б-Ш-С0	09Б-Ш-КТ0	09Б-Ш-КИ0	09Б-Ш-КС0	09Б-Ш-ИТ0	09Б-Ш-СТ0	09Б-Ш-ИС0
09Б-Ш-К1	09Б-Ш-Т1	09Б-Ш-И1	09Б-Ш-С1	09Б-Ш-КТ1	09Б-Ш-КИ1	09Б-Ш-КС1	09Б-Ш-ИТ1	09Б-Ш-СТ1	09Б-Ш-ИС1
09Б-Ш-К2	09Б-Ш-Т2	09Б-Ш-И2	09Б-Ш-С2	09Б-Ш-КТ2	09Б-Ш-КИ2	09Б-Ш-КС2	09Б-Ш-ИТ2	09Б-Ш-СТ2	09Б-Ш-ИС2
09Б-Ш-К3	09Б-Ш-Т3	09Б-Ш-И3	09Б-Ш-С3	09Б-Ш-КТ3	09Б-Ш-КИ3	09Б-Ш-КС3	09Б-Ш-ИТ3	09Б-Ш-СТ3	09Б-Ш-ИС3
09Б-Ш-К4	09Б-Ш-Т4	09Б-Ш-И4	09Б-Ш-С4	09Б-Ш-КТ4	09Б-Ш-КИ4	09Б-Ш-КС4	09Б-Ш-ИТ4	09Б-Ш-СТ4	09Б-Ш-ИС4
09Б-Ш-К5	09Б-Ш-Т5	09Б-Ш-И5	09Б-Ш-С5	09Б-Ш-КТ5	09Б-Ш-КИ5	09Б-Ш-КС5	09Б-Ш-ИТ5	09Б-Ш-СТ5	09Б-Ш-ИС5
09Б-Ш-К6	09Б-Ш-Т6	09Б-Ш-И6	09Б-Ш-С6	09Б-Ш-КТ6	09Б-Ш-КИ6	09Б-Ш-КС6	09Б-Ш-ИТ6	09Б-Ш-СТ6	09Б-Ш-ИС6
Сапоги для школьников (09С)									
09С-Ш-К0	09С-Ш-Т0	09С-Ш-И0	09С-Ш-С0	09С-Ш-КТ0	09С-Ш-КИ0	09С-Ш-КС0	09С-Ш-ИТ0	09С-Ш-СТ0	09С-Ш-ИС0
09С-Ш-К1	09С-Ш-Т1	09С-Ш-И1	09С-Ш-С1	09С-Ш-КТ1	09С-Ш-КИ1	09С-Ш-КС1	09С-Ш-ИТ1	09С-Ш-СТ1	09С-Ш-ИС1
09С-Ш-К2	09С-Ш-Т2	09С-Ш-И2	09С-Ш-С2	09С-Ш-КТ2	09С-Ш-КИ2	09С-Ш-КС2	09С-Ш-ИТ2	09С-Ш-СТ2	09С-Ш-ИС2
09С-Ш-К3	09С-Ш-Т3	09С-Ш-И3	09С-Ш-С3	09С-Ш-КТ3	09С-Ш-КИ3	09С-Ш-КС3	09С-Ш-ИТ3	09С-Ш-СТ3	09С-Ш-ИС3
09С-Ш-К4	09С-Ш-Т4	09С-Ш-И4	09С-Ш-С4	09С-Ш-КТ4	09С-Ш-КИ4	09С-Ш-КС4	09С-Ш-ИТ4	09С-Ш-СТ4	09С-Ш-ИС4
09С-Ш-К5	09С-Ш-Т5	09С-Ш-И5	09С-Ш-С5	09С-Ш-КТ5	09С-Ш-КИ5	09С-Ш-КС5	09С-Ш-ИТ5	09С-Ш-СТ5	09С-Ш-ИС5
09С-Ш-К6	09С-Ш-Т6	09С-Ш-И6	09С-Ш-С6	09С-Ш-КТ6	09С-Ш-КИ6	09С-Ш-КС6	09С-Ш-ИТ6	09С-Ш-СТ6	09С-Ш-ИС6
Полусапоги, полусапожки для школьников (09ПС)									
09ПС-Ш-К0	09ПС-Ш-Т0	09ПС-Ш-И0	09ПС-Ш-С0	09ПС-Ш-КТ0	09ПС-Ш-КИ0	09ПС-Ш-КС0	09ПС-Ш-ИТ0	09ПС-Ш-СТ0	09ПС-Ш-ИС0
09ПС-Ш-К1	09ПС-Ш-Т1	09ПС-Ш-И1	09ПС-Ш-С1	09ПС-Ш-КТ1	09ПС-Ш-КИ1	09ПС-Ш-КС1	09ПС-Ш-ИТ1	09ПС-Ш-СТ1	09ПС-Ш-ИС1
09ПС-Ш-К2	09ПС-Ш-Т2	09ПС-Ш-И2	09ПС-Ш-С2	09ПС-Ш-КТ2	09ПС-Ш-КИ2	09ПС-Ш-КС2	09ПС-Ш-ИТ2	09ПС-Ш-СТ2	09ПС-Ш-ИС2
09ПС-Ш-К3	09ПС-Ш-Т3	09ПС-Ш-И3	09ПС-Ш-С3	09ПС-Ш-КТ3	09ПС-Ш-КИ3	09ПС-Ш-КС3	09ПС-Ш-ИТ3	09ПС-Ш-СТ3	09ПС-Ш-ИС3
09ПС-Ш-К4	09ПС-Ш-Т4	09ПС-Ш-И4	09ПС-Ш-С4	09ПС-Ш-КТ4	09ПС-Ш-КИ4	09ПС-Ш-КС4	09ПС-Ш-ИТ4	09ПС-Ш-СТ4	09ПС-Ш-ИС4
09ПС-Ш-К5	09ПС-Ш-Т5	09ПС-Ш-И5	09ПС-Ш-С5	09ПС-Ш-КТ5	09ПС-Ш-КИ5	09ПС-Ш-КС5	09ПС-Ш-ИТ5	09ПС-Ш-СТ5	09ПС-Ш-ИС5
09ПС-Ш-К6	09ПС-Ш-Т6	09ПС-Ш-И6	09ПС-Ш-С6	09ПС-Ш-КТ6	09ПС-Ш-КИ6	09ПС-Ш-КС6	09ПС-Ш-ИТ6	09ПС-Ш-СТ6	09ПС-Ш-ИС6

Полуботинки для школьников (010ПБ)									
010ПБ-Ш-К0	010ПБ-Ш-Т0	010ПБ-Ш-И0	010ПБ-Ш-С0	010ПБ-Ш-КТ0	010ПБ-Ш-КИ0	010ПБ-Ш-КС0	010ПБ-Ш-ИТ0	010ПБ-Ш-СТ0	010ПБ-Ш-ИС0
010ПБ-Ш-К1	010ПБ-Ш-Т1	010ПБ-Ш-И1	010ПБ-Ш-С1	010ПБ-Ш-КТ1	010ПБ-Ш-КИ1	010ПБ-Ш-КС1	010ПБ-Ш-ИТ1	010ПБ-Ш-СТ1	010ПБ-Ш-ИС1
010ПБ-Ш-К2	010ПБ-Ш-Т2	010ПБ-Ш-И2	010ПБ-Ш-С2	010ПБ-Ш-КТ2	010ПБ-Ш-КИ2	010ПБ-Ш-КС2	010ПБ-Ш-ИТ2	010ПБ-Ш-СТ2	010ПБ-Ш-ИС2
010ПБ-Ш-К3	010ПБ-Ш-Т3	010ПБ-Ш-И3	010ПБ-Ш-С3	010ПБ-Ш-КТ3	010ПБ-Ш-КИ3	010ПБ-Ш-КС3	010ПБ-Ш-ИТ3	010ПБ-Ш-СТ3	010ПБ-Ш-ИС3
010ПБ-Ш-К4	010ПБ-Ш-Т4	010ПБ-Ш-И4	010ПБ-Ш-С4	010ПБ-Ш-КТ4	010ПБ-Ш-КИ4	010ПБ-Ш-КС4	010ПБ-Ш-ИТ4	010ПБ-Ш-СТ4	010ПБ-Ш-ИС4
010ПБ-Ш-К5	010ПБ-Ш-Т5	010ПБ-Ш-И5	010ПБ-Ш-С5	010ПБ-Ш-КТ5	010ПБ-Ш-КИ5	010ПБ-Ш-КС5	010ПБ-Ш-ИТ5	010ПБ-Ш-СТ5	010ПБ-Ш-ИС5
010ПБ-Ш-К6	010ПБ-Ш-Т6	010ПБ-Ш-И6	010ПБ-Ш-С6	010ПБ-Ш-КТ6	010ПБ-Ш-КИ6	010ПБ-Ш-КС6	010ПБ-Ш-ИТ6	010ПБ-Ш-СТ6	010ПБ-Ш-ИС6
Туфли для школьников (011Т)									
011Т-Ш-К0	011Т-Ш-Т0	011Т-Ш-И0	011Т-Ш-С0	011Т-Ш-КТ0	011Т-Ш-КИ0	011Т-Ш-КС0	011Т-Ш-ИТ0	011Т-Ш-СТ0	011Т-Ш-ИС0
011Т-Ш-К1	011Т-Ш-Т1	011Т-Ш-И1	011Т-Ш-С1	011Т-Ш-КТ1	011Т-Ш-КИ1	011Т-Ш-КС1	011Т-Ш-ИТ1	011Т-Ш-СТ1	011Т-Ш-ИС1
011Т-Ш-К2	011Т-Ш-Т2	011Т-Ш-И2	011Т-Ш-С2	011Т-Ш-КТ2	011Т-Ш-КИ2	011Т-Ш-КС2	011Т-Ш-ИТ2	011Т-Ш-СТ2	011Т-Ш-ИС2
011Т-Ш-К3	011Т-Ш-Т3	011Т-Ш-И3	011Т-Ш-С3	011Т-Ш-КТ3	011Т-Ш-КИ3	011Т-Ш-КС3	011Т-Ш-ИТ3	011Т-Ш-СТ3	011Т-Ш-ИС3
011Т-Ш-К4	011Т-Ш-Т4	011Т-Ш-И4	011Т-Ш-С4	011Т-Ш-КТ4	011Т-Ш-КИ4	011Т-Ш-КС4	011Т-Ш-ИТ4	011Т-Ш-СТ4	011Т-Ш-ИС4
011Т-Ш-К5	011Т-Ш-Т5	011Т-Ш-И5	011Т-Ш-С5	011Т-Ш-КТ5	011Т-Ш-КИ5	011Т-Ш-КС5	011Т-Ш-ИТ5	011Т-Ш-СТ5	011Т-Ш-ИС5
011Т-Ш-К6	011Т-Ш-Т6	011Т-Ш-И6	011Т-Ш-С6	011Т-Ш-КТ6	011Т-Ш-КИ6	011Т-Ш-КС6	011Т-Ш-ИТ6	011Т-Ш-СТ6	011Т-Ш-ИС6
Обувь подростковая девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пд)/225(35) – 255(40)									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки подростковые девичьи (09Б)									
09Б-Пд-К0	09Б-Пд-Т0	09Б-Пд-И0	09Б-Пд-С0	09Б-Пд-КТ0	09Б-Пд-КИ0	09Б-Пд-КС0	09Б-Пд-ИТ0	09Б-Пд-СТ0	09Б-Пд-ИС0
09Б-Пд-К1	09Б-Пд-Т1	09Б-Пд-И1	09Б-Пд-С1	09Б-Пд-КТ1	09Б-Пд-КИ1	09Б-Пд-КС1	09Б-Пд-ИТ1	09Б-Пд-СТ1	09Б-Пд-ИС1
09Б-Пд-К2	09Б-Пд-Т2	09Б-Пд-И2	09Б-Пд-С2	09Б-Пд-КТ2	09Б-Пд-КИ2	09Б-Пд-КС2	09Б-Пд-ИТ2	09Б-Пд-СТ2	09Б-Пд-ИС2
09Б-Пд-К3	09Б-Пд-Т3	09Б-Пд-И3	09Б-Пд-С3	09Б-Пд-КТ3	09Б-Пд-КИ3	09Б-Пд-КС3	09Б-Пд-ИТ3	09Б-Пд-СТ3	09Б-Пд-ИС3
09Б-Пд-К4	09Б-Пд-Т4	09Б-Пд-И4	09Б-Пд-С4	09Б-Пд-КТ4	09Б-Пд-КИ4	09Б-Пд-КС4	09Б-Пд-ИТ4	09Б-Пд-СТ4	09Б-Пд-ИС4
09Б-Пд-К5	09Б-Пд-Т5	09Б-Пд-И5	09Б-Пд-С5	09Б-Пд-КТ5	09Б-Пд-КИ5	09Б-Пд-КС5	09Б-Пд-ИТ5	09Б-Пд-СТ5	09Б-Пд-ИС5
09Б-Пд-К6	09Б-Пд-Т6	09Б-Пд-И6	09Б-Пд-С6	09Б-Пд-КТ6	09Б-Пд-КИ6	09Б-Пд-КС6	09Б-Пд-ИТ6	09Б-Пд-СТ6	09Б-Пд-ИС6

Сапоги подростковые девичьи (09С)									
09С-Пд-К0	09С-Пд-Т0	09С-Пд-И0	09С-Пд-С0	09С-Пд-КТ0	09С-Пд-КИ0	09С-Пд-КС0	09С-Пд-ИТ0	09С-Пд-СТ0	09С-Пд-ИС0
09С-Пд-К1	09С-Пд-Т1	09С-Пд-И1	09С-Пд-С1	09С-Пд-КТ1	09С-Пд-КИ1	09С-Пд-КС1	09С-Пд-ИТ1	09С-Пд-СТ1	09С-Пд-ИС1
09С-Пд-К2	09С-Пд-Т2	09С-Пд-И2	09С-Пд-С2	09С-Пд-КТ2	09С-Пд-КИ2	09С-Пд-КС2	09С-Пд-ИТ2	09С-Пд-СТ2	09С-Пд-ИС2
09С-Пд-К3	09С-Пд-Т3	09С-Пд-И3	09С-Пд-С3	09С-Пд-КТ3	09С-Пд-КИ3	09С-Пд-КС3	09С-Пд-ИТ3	09С-Пд-СТ3	09С-Пд-ИС3
09С-Пд-К4	09С-Пд-Т4	09С-Пд-И4	09С-Пд-С4	09С-Пд-КТ4	09С-Пд-КИ4	09С-Пд-КС4	09С-Пд-ИТ4	09С-Пд-СТ4	09С-Пд-ИС4
09С-Пд-К5	09С-Пд-Т5	09С-Пд-И5	09С-Пд-С5	09С-Пд-КТ5	09С-Пд-КИ5	09С-Пд-КС5	09С-Пд-ИТ5	09С-Пд-СТ5	09С-Пд-ИС5
09С-Пд-К6	09С-Пд-Т6	09С-Пд-И6	09С-Пд-С6	09С-Пд-КТ6	09С-Пд-КИ6	09С-Пд-КС6	09С-Пд-ИТ6	09С-Пд-СТ6	09С-Пд-ИС6
Полусапоги, полусапожки подростковые девичьи (09ПС)									
09ПС-Пд-К0	09ПС-Пд-Т0	09ПС-Пд-И0	09ПС-Пд-С0	09ПС-Пд-КТ0	09ПС-Пд-КИ0	09ПС-Пд-КС0	09ПС-Пд-ИТ0	09ПС-Пд-СТ0	09ПС-Пд-ИС0
09ПС-Пд-К1	09ПС-Пд-Т1	09ПС-Пд-И1	09ПС-Пд-С1	09ПС-Пд-КТ1	09ПС-Пд-КИ1	09ПС-Пд-КС1	09ПС-Пд-ИТ1	09ПС-Пд-СТ1	09ПС-Пд-ИС1
09ПС-Пд-К2	09ПС-Пд-Т2	09ПС-Пд-И2	09ПС-Пд-С2	09ПС-Пд-КТ2	09ПС-Пд-КИ2	09ПС-Пд-КС2	09ПС-Пд-ИТ2	09ПС-Пд-СТ2	09ПС-Пд-ИС2
09ПС-Пд-К3	09ПС-Пд-Т3	09ПС-Пд-И3	09ПС-Пд-С3	09ПС-Пд-КТ3	09ПС-Пд-КИ3	09ПС-Пд-КС3	09ПС-Пд-ИТ3	09ПС-Пд-СТ3	09ПС-Пд-ИС3
09ПС-Пд-К4	09ПС-Пд-Т4	09ПС-Пд-И4	09ПС-Пд-С4	09ПС-Пд-КТ4	09ПС-Пд-КИ4	09ПС-Пд-КС4	09ПС-Пд-ИТ4	09ПС-Пд-СТ4	09ПС-Пд-ИС4
09ПС-Пд-К5	09ПС-Пд-Т5	09ПС-Пд-И5	09ПС-Пд-С5	09ПС-Пд-КТ5	09ПС-Пд-КИ5	09ПС-Пд-КС5	09ПС-Пд-ИТ5	09ПС-Пд-СТ5	09ПС-Пд-ИС5
09ПС-Пд-К6	09ПС-Пд-Т6	09ПС-Пд-И6	09ПС-Пд-С6	09ПС-Пд-КТ6	09ПС-Пд-КИ6	09ПС-Пд-КС6	09ПС-Пд-ИТ6	09ПС-Пд-СТ6	09ПС-Пд-ИС6
Полуботинки подростковые девичьи (010ПБ)									
010ПБ-Пд-К0	010ПБ-Пд-Т0	010ПБ-Пд-И0	010ПБ-Пд-С0	010ПБ-Пд-КТ0	010ПБ-Пд-КИ0	010ПБ-Пд-КС0	010ПБ-Пд-ИТ0	010ПБ-Пд-СТ0	010ПБ-Пд-ИС0
010ПБ-Пд-К1	010ПБ-Пд-Т1	010ПБ-Пд-И1	010ПБ-Пд-С1	010ПБ-Пд-КТ1	010ПБ-Пд-КИ1	010ПБ-Пд-КС1	010ПБ-Пд-ИТ1	010ПБ-Пд-СТ1	010ПБ-Пд-ИС1
010ПБ-Пд-К2	010ПБ-Пд-Т2	010ПБ-Пд-И2	010ПБ-Пд-С2	010ПБ-Пд-КТ2	010ПБ-Пд-КИ2	010ПБ-Пд-КС2	010ПБ-Пд-ИТ2	010ПБ-Пд-СТ2	010ПБ-Пд-ИС2
010ПБ-Пд-К3	010ПБ-Пд-Т3	010ПБ-Пд-И3	010ПБ-Пд-С3	010ПБ-Пд-КТ3	010ПБ-Пд-КИ3	010ПБ-Пд-КС3	010ПБ-Пд-ИТ3	010ПБ-Пд-СТ3	010ПБ-Пд-ИС3
010ПБ-Пд-К4	010ПБ-Пд-Т4	010ПБ-Пд-И4	010ПБ-Пд-С4	010ПБ-Пд-КТ4	010ПБ-Пд-КИ4	010ПБ-Пд-КС4	010ПБ-Пд-ИТ4	010ПБ-Пд-СТ4	010ПБ-Пд-ИС4
010ПБ-Пд-К5	010ПБ-Пд-Т5	010ПБ-Пд-И5	010ПБ-Пд-С5	010ПБ-Пд-КТ5	010ПБ-Пд-КИ5	010ПБ-Пд-КС5	010ПБ-Пд-ИТ5	010ПБ-Пд-СТ5	010ПБ-Пд-ИС5
010ПБ-Пд-К6	010ПБ-Пд-Т6	010ПБ-Пд-И6	010ПБ-Пд-С6	010ПБ-Пд-КТ6	010ПБ-Пд-КИ6	010ПБ-Пд-КС6	010ПБ-Пд-ИТ6	010ПБ-Пд-СТ6	010ПБ-Пд-ИС6

Туфли подростковые девичьи (011Т)									
011Т-Пд-К0	011Т-Пд-Т0	011Т-Пд-И0	011Т-Пд-С0	011Т-Пд-КТ0	011Т-Пд-КИ0	011Т-Пд-КС0	011Т-Пд-ИТ0	011Т-Пд-СТ0	011Т-Пд-ИС0
011Т-Пд-К1	011Т-Пд-Т1	011Т-Пд-И1	011Т-Пд-С1	011Т-Пд-КТ1	011Т-Пд-КИ1	011Т-Пд-КС1	011Т-Пд-ИТ1	011Т-Пд-СТ1	011Т-Пд-ИС1
011Т-Пд-К2	011Т-Пд-Т2	011Т-Пд-И2	011Т-Пд-С2	011Т-Пд-КТ2	011Т-Пд-КИ2	011Т-Пд-КС2	011Т-Пд-ИТ2	011Т-Пд-СТ2	011Т-Пд-ИС2
011Т-Пд-К3	011Т-Пд-Т3	011Т-Пд-И3	011Т-Пд-С3	011Т-Пд-КТ3	011Т-Пд-КИ3	011Т-Пд-КС3	011Т-Пд-ИТ3	011Т-Пд-СТ3	011Т-Пд-ИС3
011Т-Пд-К4	011Т-Пд-Т4	011Т-Пд-И4	011Т-Пд-С4	011Т-Пд-КТ4	011Т-Пд-КИ4	011Т-Пд-КС4	011Т-Пд-ИТ4	011Т-Пд-СТ4	011Т-Пд-ИС4
011Т-Пд-К5	011Т-Пд-Т5	011Т-Пд-И5	011Т-Пд-С5	011Т-Пд-КТ5	011Т-Пд-КИ5	011Т-Пд-КС5	011Т-Пд-ИТ5	011Т-Пд-СТ5	011Т-Пд-ИС5
011Т-Пд-К6	011Т-Пд-Т6	011Т-Пд-И6	011Т-Пд-С6	011Т-Пд-КТ6	011Т-Пд-КИ6	011Т-Пд-КС6	011Т-Пд-ИТ6	011Т-Пд-СТ6	011Т-Пд-ИС6
Обувь подростковая мальчиковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пм)/245(38) – 275(43)									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожа (ИС)
Ботинки подростковые мальчиковые (09Б)									
09Б-Пм-К0	09Б-Пм-Т0	09Б-Пм-И0	09Б-Пм-С0	09Б-Пм-КТ0	09Б-Пм-КИ0	09Б-Пм-КС0	09Б-Пм-ИТ0	09Б-Пм-СТ0	09Б-Пм-ИС0
09Б-Пм-К1	09Б-Пм-Т1	09Б-Пм-И1	09Б-Пм-С1	09Б-Пм-КТ1	09Б-Пм-КИ1	09Б-Пм-КС1	09Б-Пм-ИТ1	09Б-Пм-СТ1	09Б-Пм-ИС1
09Б-Пм-К2	09Б-Пм-Т2	09Б-Пм-И2	09Б-Пм-С2	09Б-Пм-КТ2	09Б-Пм-КИ2	09Б-Пм-КС2	09Б-Пм-ИТ2	09Б-Пм-СТ2	09Б-Пм-ИС2
09Б-Пм-К3	09Б-Пм-Т3	09Б-Пм-И3	09Б-Пм-С3	09Б-Пм-КТ3	09Б-Пм-КИ3	09Б-Пм-КС3	09Б-Пм-ИТ3	09Б-Пм-СТ3	09Б-Пм-ИС3
09Б-Пм-К4	09Б-Пм-Т4	09Б-Пм-И4	09Б-Пм-С4	09Б-Пм-КТ4	09Б-Пм-КИ4	09Б-Пм-КС4	09Б-Пм-ИТ4	09Б-Пм-СТ4	09Б-Пм-ИС4
09Б-Пм-К5	09Б-Пм-Т5	09Б-Пм-И5	09Б-Пм-С5	09Б-Пм-КТ5	09Б-Пм-КИ5	09Б-Пм-КС5	09Б-Пм-ИТ5	09Б-Пм-СТ5	09Б-Пм-ИС5
09Б-Пм-К6	09Б-Пм-Т6	09Б-Пм-И6	09Б-Пм-С6	09Б-Пм-КТ6	09Б-Пм-КИ6	09Б-Пм-КС6	09Б-Пм-ИТ6	09Б-Пм-СТ6	09Б-Пм-ИС6
Сапоги подростковые мальчиковые (09С)									
09С-Пм-К0	09С-Пм-Т0	09С-Пм-И0	09С-Пм-С0	09С-Пм-КТ0	09С-Пм-КИ0	09С-Пм-КС0	09С-Пм-ИТ0	09С-Пм-СТ0	09С-Пм-ИС0
09С-Пм-К1	09С-Пм-Т1	09С-Пм-И1	09С-Пм-С1	09С-Пм-КТ1	09С-Пм-КИ1	09С-Пм-КС1	09С-Пм-ИТ1	09С-Пм-СТ1	09С-Пм-ИС1
09С-Пм-К2	09С-Пм-Т2	09С-Пм-И2	09С-Пм-С2	09С-Пм-КТ2	09С-Пм-КИ2	09С-Пм-КС2	09С-Пм-ИТ2	09С-Пм-СТ2	09С-Пм-ИС2
09С-Пм-К3	09С-Пм-Т3	09С-Пм-И3	09С-Пм-С3	09С-Пм-КТ3	09С-Пм-КИ3	09С-Пм-КС3	09С-Пм-ИТ3	09С-Пм-СТ3	09С-Пм-ИС3
09С-Пм-К4	09С-Пм-Т4	09С-Пм-И4	09С-Пм-С4	09С-Пм-КТ4	09С-Пм-КИ4	09С-Пм-КС4	09С-Пм-ИТ4	09С-Пм-СТ4	09С-Пм-ИС4
09С-Пм-К5	09С-Пм-Т5	09С-Пм-И5	09С-Пм-С5	09С-Пм-КТ5	09С-Пм-КИ5	09С-Пм-КС5	09С-Пм-ИТ5	09С-Пм-СТ5	09С-Пм-ИС5
09С-Пм-К6	09С-Пм-Т6	09С-Пм-И6	09С-Пм-С6	09С-Пм-КТ6	09С-Пм-КИ6	09С-Пм-КС6	09С-Пм-ИТ6	09С-Пм-СТ6	09С-Пм-ИС6

Полусапоги, полусапожки подростковые мальчиковые (09ПС)									
09ПС-Пм-К0	09ПС-Пм-Т0	09ПС-Пм-И0	09ПС-Пм-С0	09ПС-Пм-КТ0	09ПС-Пм-КИ0	09ПС-Пм-КС0	09ПС-Пм-ИТ0	09ПС-Пм-СТ0	09ПС-Пм-ИС0
09ПС-Пм-К1	09ПС-Пм-Т1	09ПС-Пм-И1	09ПС-Пм-С1	09ПС-Пм-КТ1	09ПС-Пм-КИ1	09ПС-Пм-КС1	09ПС-Пм-ИТ1	09ПС-Пм-СТ1	09ПС-Пм-ИС1
09ПС-Пм-К2	09ПС-Пм-Т2	09ПС-Пм-И2	09ПС-Пм-С2	09ПС-Пм-КТ2	09ПС-Пм-КИ2	09ПС-Пм-КС2	09ПС-Пм-ИТ2	09ПС-Пм-СТ2	09ПС-Пм-ИС2
09ПС-Пм-К3	09ПС-Пм-Т3	09ПС-Пм-И3	09ПС-Пм-С3	09ПС-Пм-КТ3	09ПС-Пм-КИ3	09ПС-Пм-КС3	09ПС-Пм-ИТ3	09ПС-Пм-СТ3	09ПС-Пм-ИС3
09ПС-Пм-К4	09ПС-Пм-Т4	09ПС-Пм-И4	09ПС-Пм-С4	09ПС-Пм-КТ4	09ПС-Пм-КИ4	09ПС-Пм-КС4	09ПС-Пм-ИТ4	09ПС-Пм-СТ4	09СП-Пм-ИС4
09ПС-Пм-К5	09ПС-Пм-Т5	09ПС-Пм-И5	09ПС-Пм-С5	09ПС-Пм-КТ5	09ПС-Пм-КИ5	09ПС-Пм-КС5	09ПС-Пм-ИТ5	09ПС-Пм-СТ5	09ПС-Пм-ИС5
09ПС-Пм-К6	09ПС-Пм-Т6	09ПС-Пм-И6	09ПС-Пм-С6	09ПС-Пм-КТ6	09ПС-Пм-КИ6	09ПС-Пм-КС6	09ПС-Пм-ИТ6	09ПС-Пм-СТ6	09ПС-Пм-ИС6
Полуботинки подростковые мальчиковые (010ПБ)									
010ПБ-Пм-К0	010ПБ-Пм-Т0	010ПБ-Пм-И0	010ПБ-Пм-С0	010ПБ-Пм-КТ0	010ПБ-Пм-КИ0	010ПБ-Пм-КС0	010ПБ-Пм-ИТ0	010ПБ-Пм-СТ0	010ПБ-Пм-ИС0
010ПБ-Пм-К1	010ПБ-Пм-Т1	010ПБ-Пм-И1	010ПБ-Пм-С1	010ПБ-Пм-КТ1	010ПБ-Пм-КИ1	010ПБ-Пм-КС1	010ПБ-Пм-ИТ1	010ПБ-Пм-СТ1	010ПБ-Пм-ИС1
010ПБ-Пм-К2	010ПБ-Пм-Т2	010ПБ-Пм-И2	010ПБ-Пм-С2	010ПБ-Пм-КТ2	010ПБ-Пм-КИ2	010ПБ-Пм-КС2	010ПБ-Пм-ИТ2	010ПБ-Пм-СТ2	010ПБ-Пм-ИС2
010ПБ-Пм-К3	010ПБ-Пм-Т3	010ПБ-Пм-И3	010ПБ-Пм-С3	010ПБ-Пм-КТ3	010ПБ-Пм-КИ3	010ПБ-Пм-КС3	010ПБ-Пм-ИТ3	010ПБ-Пм-СТ3	010ПБ-Пм-ИС3
010ПБ-Пм-К4	010ПБ-Пм-Т4	010ПБ-Пм-И4	010ПБ-Пм-С4	010ПБ-Пм-КТ4	010ПБ-Пм-КИ4	010ПБ-Пм-КС4	010ПБ-Пм-ИТ4	010ПБ-Пм-СТ4	010ПБ-Пм-ИС4
010ПБ-Пм-К5	010ПБ-Пм-Т5	010ПБ-Пм-И5	010ПБ-Пм-С5	010ПБ-Пм-КТ5	010ПБ-Пм-КИ5	010ПБ-Пм-КС5	010ПБ-Пм-ИТ5	010ПБ-Пм-СТ5	010ПБ-Пм-ИС5
010ПБ-Пм-К6	010ПБ-Пм-Т6	010ПБ-Пм-И6	010ПБ-Пм-С6	010ПБ-Пм-КТ6	010ПБ-Пм-КИ6	010ПБ-Пм-КС6	010ПБ-Пм-ИТ6	010ПБ-Пм-СТ6	010ПБ-Пм-ИС6
Туфли подростковые мальчиковые (011Т)									
011Т-Пм-К0	011Т-Пм-Т0	011Т-Пм-И0	011Т-Пм-С0	011Т-Пм-КТ0	011Т-Пм-КИ0	011Т-Пм-КС0	011Т-Пм-ИТ0	011Т-Пм-СТ0	011Т-Пм-ИС0
011Т-Пм-К1	011Т-Пм-Т1	011Т-Пм-И1	011Т-Пм-С1	011Т-Пм-КТ1	011Т-Пм-КИ1	011Т-Пм-КС1	011Т-Пм-ИТ1	011Т-Пм-СТ1	011Т-Пм-ИС1
011Т-Пм-К2	011Т-Пм-Т2	011Т-Пм-И2	011Т-Пм-С2	011Т-Пм-КТ2	011Т-Пм-КИ2	011Т-Пм-КС2	011Т-Пм-ИТ2	011Т-Пм-СТ2	011Т-Пм-ИС2
011Т-Пм-К3	011Т-Пм-Т3	011Т-Пм-И3	011Т-Пм-С3	011Т-Пм-КТ3	011Т-Пм-КИ3	011Т-Пм-КС3	011Т-Пм-ИТ3	011Т-Пм-СТ3	011Т-Пм-ИС3
011Т-Пм-К4	011Т-Пм-Т4	011Т-Пм-И4	011Т-Пм-С4	011Т-Пм-КТ4	011Т-Пм-КИ4	011Т-Пм-КС4	011Т-Пм-ИТ4	011Т-Пм-СТ4	011Т-Пм-ИС4
011Т-Пм-К5	011Т-Пм-Т5	011Т-Пм-И5	011Т-Пм-С5	011Т-Пм-КТ5	011Т-Пм-КИ5	011Т-Пм-КС5	011Т-Пм-ИТ5	011Т-Пм-СТ5	011Т-Пм-ИС5
011Т-Пм-К6	011Т-Пм-Т6	011Т-Пм-И6	011Т-Пм-С6	011Т-Пм-КТ6	011Т-Пм-КИ6	011Т-Пм-КС6	011Т-Пм-ИТ6	011Т-Пм-СТ6	011Т-Пм-ИС6

Обувь женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом Ж/230(36) – 275(43)									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки женские (09Б)									
09Б-Ж-К0	09Б-Ж-Т0	09Б-Ж-И0	09Б-Ж-С0	09Б-Ж-КТ0	09Б-Ж-КИ0	09Б-Ж-КС0	09Б-Ж-ИТ0	09Б-Ж-СТ0	09Б-Ж-ИС0
09Б-Ж-К1	09Б-Ж-Т1	09Б-Ж-И1	09Б-Ж-С1	09Б-Ж-КТ1	09Б-Ж-КИ1	09Б-Ж-КС1	09Б-Ж-ИТ1	09Б-Ж-СТ1	09Б-Ж-ИС1
09Б-Ж-К2	09Б-Ж-Т2	09Б-Ж-И2	09Б-Ж-С2	09Б-Ж-КТ2	09Б-Ж-КИ2	09Б-Ж-КС2	09Б-Ж-ИТ2	09Б-Ж-СТ2	09Б-Ж-ИС2
09Б-Ж-К3	09Б-Ж-Т3	09Б-Ж-И3	09Б-Ж-С3	09Б-Ж-КТ3	09Б-Ж-КИ3	09Б-Ж-КС3	09Б-Ж-ИТ3	09Б-Ж-СТ3	09Б-Ж-ИС3
09Б-Ж-К4	09Б-Ж-Т4	09Б-Ж-И4	09Б-Ж-С4	09Б-Ж-КТ4	09Б-Ж-КИ4	09Б-Ж-КС4	09Б-Ж-ИТ4	09Б-Ж-СТ4	09Б-Ж-ИС4
09Б-Ж-К5	09Б-Ж-Т5	09Б-Ж-И5	09Б-Ж-С5	09Б-Ж-КТ5	09Б-Ж-КИ5	09Б-Ж-КС5	09Б-Ж-ИТ5	09Б-Ж-СТ5	09Б-Ж-ИС5
09Б-Ж-К6	09Б-Ж-Т6	09Б-Ж-И6	09Б-Ж-С6	09Б-Ж-КТ6	09Б-Ж-КИ6	09Б-Ж-КС6	09Б-Ж-ИТ6	09Б-Ж-СТ6	09Б-Ж-ИС6
Салоги женские (09С)									
09С-Ж-К0	09С-Ж-Т0	09С-Ж-И0	09С-Ж-С0	09С-Ж-КТ0	09С-Ж-КИ0	09С-Ж-КС0	09С-Ж-ИТ0	09С-Ж-СТ0	09С-Ж-ИС0
09С-Ж-К1	09С-Ж-Т1	09С-Ж-И1	09С-Ж-С1	09С-Ж-КТ1	09С-Ж-КИ1	09С-Ж-КС1	09С-Ж-ИТ1	09С-Ж-СТ1	09С-Ж-ИС1
09С-Ж-К2	09С-Ж-Т2	09С-Ж-И2	09С-Ж-С2	09С-Ж-КТ2	09С-Ж-КИ2	09С-Ж-КС2	09С-Ж-ИТ2	09С-Ж-СТ2	09С-Ж-ИС2
09С-Ж-К3	09С-Ж-Т3	09С-Ж-И3	09С-Ж-С3	09С-Ж-КТ3	09С-Ж-КИ3	09С-Ж-КС3	09С-Ж-ИТ3	09С-Ж-СТ3	09С-Ж-ИС3
09С-Ж-К4	09С-Ж-Т4	09С-Ж-И4	09С-Ж-С4	09С-Ж-КТ4	09С-Ж-КИ4	09С-Ж-КС4	09С-Ж-ИТ4	09С-Ж-СТ4	09С-Ж-ИС4
09С-Ж-К5	09С-Ж-Т5	09С-Ж-И5	09С-Ж-С5	09С-Ж-КТ5	09С-Ж-КИ5	09С-Ж-КС5	09С-Ж-ИТ5	09С-Ж-СТ5	09С-Ж-ИС5
09С-Ж-К6	09С-Ж-Т6	09С-Ж-И6	09С-Ж-С6	09С-Ж-КТ6	09С-Ж-КИ6	09С-Ж-КС6	09С-Ж-ИТ6	09С-Ж-СТ6	09С-Ж-ИС6
Полусаалоги, полусапожки женские (09ПС)									
09ПС-Ж-К0	09ПС-Ж-Т0	09ПС-Ж-И0	09ПС-Ж-С0	09ПС-Ж-КТ0	09ПС-Ж-КИ0	09ПС-Ж-КС0	09ПС-Ж-ИТ0	09ПС-Ж-СТ0	09ПС-Ж-ИС0
09ПС-Ж-К1	09ПС-Ж-Т1	09ПС-Ж-И1	09ПС-Ж-С1	09ПС-Ж-КТ1	09ПС-Ж-КИ1	09ПС-Ж-КС1	09ПС-Ж-ИТ1	09ПС-Ж-СТ1	09ПС-Ж-ИС1
09ПС-Ж-К2	09ПС-Ж-Т2	09ПС-Ж-И2	09ПС-Ж-С2	09ПС-Ж-КТ2	09ПС-Ж-КИ2	09ПС-Ж-КС2	09ПС-Ж-ИТ2	09ПС-Ж-СТ2	09ПС-Ж-ИС2
09ПС-Ж-К3	09ПС-Ж-Т3	09ПС-Ж-И3	09ПС-Ж-С3	09ПС-Ж-КТ3	09ПС-Ж-КИ3	09ПС-Ж-КС3	09ПС-Ж-ИТ3	09ПС-Ж-СТ3	09ПС-Ж-ИС3
09ПС-Ж-К4	09ПС-Ж-Т4	09ПС-Ж-И4	09ПС-Ж-С4	09ПС-Ж-КТ4	09ПС-Ж-КИ4	09ПС-Ж-КС4	09ПС-Ж-ИТ4	09ПС-Ж-СТ4	09ПС-Ж-ИС4
09ПС-Ж-К5	09ПС-Ж-Т5	09ПС-Ж-И5	09ПС-Ж-С5	09ПС-Ж-КТ5	09ПС-Ж-КИ5	09ПС-Ж-КС5	09ПС-Ж-ИТ5	09ПС-Ж-СТ5	09ПС-Ж-ИС5
09ПС-Ж-К6	09ПС-Ж-Т6	09ПС-Ж-И6	09ПС-Ж-С6	09ПС-Ж-КТ6	09ПС-Ж-КИ6	09ПС-Ж-КС6	09ПС-Ж-ИТ6	09ПС-Ж-СТ6	09ПС-Ж-ИС6

Полуботинки женские (010ПБ)									
010ПБ-Ж-К0	010ПБ-Ж-Т0	010ПБ-Ж-И0	010ПБ-Ж-С0	010ПБ-Ж-КТ0	010ПБ-Ж-КИ0	010ПБ-Ж-КС0	010ПБ-Ж-ИТ0	010ПБ-Ж-СТ0	010ПБ-Ж-ИС0
010ПБ-Ж-К1	010ПБ-Ж-Т1	010ПБ-Ж-И1	010ПБ-Ж-С1	010ПБ-Ж-КТ1	010ПБ-Ж-КИ1	010ПБ-Ж-КС1	010ПБ-Ж-ИТ1	010ПБ-Ж-СТ1	010ПБ-Ж-ИС1
010ПБ-Ж-К2	010ПБ-Ж-Т2	010ПБ-Ж-И2	010ПБ-Ж-С2	010ПБ-Ж-КТ2	010ПБ-Ж-КИ2	010ПБ-Ж-КС2	010ПБ-Ж-ИТ2	010ПБ-Ж-СТ2	010ПБ-Ж-ИС2
010ПБ-Ж-К3	010ПБ-Ж-Т3	010ПБ-Ж-И3	010ПБ-Ж-С3	010ПБ-Ж-КТ3	010ПБ-Ж-КИ3	010ПБ-Ж-КС3	010ПБ-Ж-ИТ3	010ПБ-Ж-СТ3	010ПБ-Ж-ИС3
010ПБ-Ж-К4	010ПБ-Ж-Т4	010ПБ-Ж-И4	010ПБ-Ж-С4	010ПБ-Ж-КТ4	010ПБ-Ж-КИ4	010ПБ-Ж-КС4	010ПБ-Ж-ИТ4	010ПБ-Ж-СТ4	010ПБ-Ж-ИС4
010ПБ-Ж-К5	010ПБ-Ж-Т5	010ПБ-Ж-И5	010ПБ-Ж-С5	010ПБ-Ж-КТ5	010ПБ-Ж-КИ5	010ПБ-Ж-КС5	010ПБ-Ж-ИТ5	010ПБ-Ж-СТ5	010ПБ-Ж-ИС5
010ПБ-Ж-К6	010ПБ-Ж-Т6	010ПБ-Ж-И6	010ПБ-Ж-С6	010ПБ-Ж-КТ6	010ПБ-Ж-КИ6	010ПБ-Ж-КС6	010ПБ-Ж-ИТ6	010ПБ-Ж-СТ6	010ПБ-Ж-ИС6
Туфли женские (011Т)									
011Т-Ж-К0	011Т-Ж-Т0	011Т-Ж-И0	011Т-Ж-С0	011Т-Ж-КТ0	011Т-Ж-КИ0	011Т-Ж-КС0	011Т-Ж-ИТ0	011Т-Ж-СТ0	011Т-Ж-ИС0
011Т-Ж-К1	011Т-Ж-Т1	011Т-Ж-И1	011Т-Ж-С1	011Т-Ж-КТ1	011Т-Ж-КИ1	011Т-Ж-КС1	011Т-Ж-ИТ1	011Т-Ж-СТ1	011Т-Ж-ИС1
011Т-Ж-К4	011Т-Ж-Т4	011Т-Ж-И4	011Т-Ж-С4	011Т-Ж-КТ4	011Т-Ж-КИ4	011Т-Ж-КС4	011Т-Ж-ИТ4	011Т-Ж-СТ4	011Т-Ж-ИС4
011Т-Ж-К5	011Т-Ж-Т5	011Т-Ж-И5	011Т-Ж-С5	011Т-Ж-КТ5	011Т-Ж-КИ5	011Т-Ж-КС5	011Т-Ж-ИТ5	011Т-Ж-СТ5	011Т-Ж-ИС5
011Т-Ж-К6	011Т-Ж-Т6	011Т-Ж-И6	011Т-Ж-С6	011Т-Ж-КТ6	011Т-Ж-КИ6	011Т-Ж-КС6	011Т-Ж-ИТ6	011Т-Ж-СТ6	011Т-Ж-ИС6
Обувь мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М)/255(40) – 305(47)									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки мужские (09Б)									
09Б-М-К0	09Б-М-Т0	09Б-М-И0	09Б-М-С0	09Б-М-КТ0	09Б-М-КИ0	09Б-М-КС0	09Б-М-ИТ0	09Б-М-СТ0	09Б-М-ИС0
09Б-М-К1	09Б-М-Т1	09Б-М-И1	09Б-М-С1	09Б-М-КТ1	09Б-М-КИ1	09Б-М-КС1	09Б-М-ИТ1	09Б-М-СТ1	09Б-М-ИС1
09Б-М-К2	09Б-М-Т2	09Б-М-И2	09Б-М-С2	09Б-М-КТ2	09Б-М-КИ2	09Б-М-КС2	09Б-М-ИТ2	09Б-М-СТ2	09Б-М-ИС2
09Б-М-К3	09Б-М-Т3	09Б-М-И3	09Б-М-С3	09Б-М-КТ3	09Б-М-КИ3	09Б-М-КС3	09Б-М-ИТ3	09Б-М-СТ3	09Б-М-ИС3
09Б-М-К4	09Б-М-Т4	09Б-М-И4	09Б-М-С4	09Б-М-КТ4	09Б-М-КИ4	09Б-М-КС4	09Б-М-ИТ4	09Б-М-СТ4	09Б-М-ИС4
09Б-М-К5	09Б-М-Т5	09Б-М-И5	09Б-М-С5	09Б-М-КТ5	09Б-М-КИ5	09Б-М-КС5	09Б-М-ИТ5	09Б-М-СТ5	09Б-М-ИС5
09Б-М-К6	09Б-М-Т6	09Б-М-И6	09Б-М-С6	09Б-М-КТ6	09Б-М-КИ6	09Б-М-КС6	09Б-М-ИТ6	09Б-М-СТ6	09Б-М-ИС6

Сапоги мужские (09С)									
09С-М-К0	09С-М-Т0	09С-М-И0	09С-М-С0	09С-М-КТ0	09С-М-КИ0	09С-М-КС0	09С-М-ИТ0	09С-М-СТ0	09С-М-ИС0
09С-М-К1	09С-М-Т1	09С-М-И1	09С-М-С1	09С-М-КТ1	09С-М-КИ1	09С-М-КС1	09С-М-ИТ1	09С-М-СТ1	09С-М-ИС1
09С-М-К2	09С-М-Т2	09С-М-И2	09С-М-С2	09С-М-КТ2	09С-М-КИ2	09С-М-КС2	09С-М-ИТ2	09С-М-СТ2	09С-М-ИС2
09С-М-К3	09С-М-Т3	09С-М-И3	09С-М-С3	09С-М-КТ3	09С-М-КИ3	09С-М-КС3	09С-М-ИТ3	09С-М-СТ3	09С-М-ИС3
09С-М-К4	09С-М-Т4	09С-М-И4	09С-М-С4	09С-М-КТ4	09С-М-КИ4	09С-М-КС4	09С-М-ИТ4	09С-М-СТ4	09С-М-ИС4
09С-М-К5	09С-М-Т5	09С-М-И5	09С-М-С5	09С-М-КТ5	09С-М-КИ5	09С-М-КС5	09С-М-ИТ5	09С-М-СТ5	09С-М-ИС5
09С-М-К6	09С-М-Т6	09С-М-И6	09С-М-С6	09С-М-КТ6	09С-М-КИ6	09С-М-КС6	09С-М-ИТ6	09С-М-СТ6	09С-М-ИС6
Полусапоги, полусапожки мужские (09ПС)									
09ПС-М-К0	09ПС-М-Т0	09ПС-М-И0	09ПС-М-С0	09ПС-М-КТ0	09ПС-М-КИ0	09ПС-М-КС0	09ПС-М-ИТ0	09ПС-М-СТ0	09ПС-М-ИС0
09ПС-М-К1	09ПС-М-Т1	09ПС-М-И1	09ПС-М-С1	09ПС-М-КТ1	09ПС-М-КИ1	09ПС-М-КС1	09ПС-М-ИТ1	09ПС-М-СТ1	09ПС-М-ИС1
09ПС-М-К2	09ПС-М-Т2	09ПС-М-И2	09ПС-М-С2	09ПС-М-КТ2	09ПС-М-КИ2	09ПС-М-КС2	09ПС-М-ИТ2	09ПС-М-СТ2	09ПС-М-ИС2
09ПС-М-К3	09ПС-М-Т3	09ПС-М-И3	09ПС-М-С3	09ПС-М-КТ3	09ПС-М-КИ3	09ПС-М-КС3	09ПС-М-ИТ3	09ПС-М-СТ3	09ПС-М-ИС3
09ПС-М-К4	09ПС-М-Т4	09ПС-М-И4	09ПС-М-С4	09ПС-М-КТ4	09ПС-М-КИ4	09ПС-М-КС4	09ПС-М-ИТ4	09ПС-М-СТ4	09ПС-М-ИС4
09ПС-М-К5	09ПС-М-Т5	09ПС-М-И5	09ПС-М-С5	09ПС-М-КТ5	09ПС-М-КИ5	09ПС-М-КС5	09ПС-М-ИТ5	09ПС-М-СТ5	09ПС-М-ИС5
09ПС-М-К6	09ПС-М-Т6	09ПС-М-И6	09ПС-М-С6	09ПС-М-КТ6	09ПС-М-КИ6	09ПС-М-КС6	09ПС-М-ИТ6	09ПС-М-СТ6	09ПС-М-ИС6
Полуботинки мужские (010ПБ)									
010ПБ-М-К0	010ПБ-М-Т0	010ПБ-М-И0	010ПБ-М-С0	010ПБ-М-КТ0	010ПБ-М-КИ0	010ПБ-М-КС0	010ПБ-М-ИТ0	010ПБ-М-СТ0	010ПБ-М-ИС0
010ПБ-М-К1	010ПБ-М-Т1	010ПБ-М-И1	010ПБ-М-С1	010ПБ-М-КТ1	010ПБ-М-КИ1	010ПБ-М-КС1	010ПБ-М-ИТ1	010ПБ-М-СТ1	010ПБ-М-ИС1
010ПБ-М-К2	010ПБ-М-Т2	010ПБ-М-И2	010ПБ-М-С2	010ПБ-М-КТ2	010ПБ-М-КИ2	010ПБ-М-КС2	010ПБ-М-ИТ2	010ПБ-М-СТ2	010ПБ-М-ИС2
010ПБ-М-К3	010ПБ-М-Т3	010ПБ-М-И3	010ПБ-М-С3	010ПБ-М-КТ3	010ПБ-М-КИ3	010ПБ-М-КС3	010ПБ-М-ИТ3	010ПБ-М-СТ3	010ПБ-М-ИС3
010ПБ-М-К4	010ПБ-М-Т4	010ПБ-М-И4	010ПБ-М-С4	010ПБ-М-КТ4	010ПБ-М-КИ4	010ПБ-М-КС4	010ПБ-М-ИТ4	010ПБ-М-СТ4	010ПБ-М-ИС4
010ПБ-М-К5	010ПБ-М-Т5	010ПБ-М-И5	010ПБ-М-С5	010ПБ-М-КТ5	010ПБ-М-КИ5	010ПБ-М-КС5	010ПБ-М-ИТ5	010ПБ-М-СТ5	010ПБ-М-ИС5
010ПБ-М-К6	010ПБ-М-Т6	010ПБ-М-И6	010ПБ-М-С6	010ПБ-М-КТ6	010ПБ-М-КИ6	010ПБ-М-КС6	010ПБ-М-ИТ6	010ПБ-М-СТ6	010ПБ-М-ИС6

Туфли мужские (011Т)									
011Т-М-К0	011Т-М-Т0	011Т-М-И0	011Т-М-С0	011Т-М-КТ0	011Т-М-КИ0	011Т-М-КС0	011Т-М-ИТ0	011Т-М-СТ0	011Т-М-ИС0
011Т-М-К1	011Т-М-Т1	011Т-М-И1	011Т-М-С1	011Т-М-КТ1	011Т-М-КИ1	011Т-М-КС1	011Т-М-ИТ1	011Т-М-СТ1	011Т-М-ИС1
011Т-М-К2	011Т-М-Т2	011Т-М-И2	011Т-М-С2	011Т-М-КТ2	011Т-М-КИ2	011Т-М-КС2	011Т-М-ИТ2	011Т-М-СТ2	011Т-М-ИС2
011Т-М-К3	011Т-М-Т3	011Т-М-И3	011Т-М-С3	011Т-М-КТ3	011Т-М-КИ3	011Т-М-КС3	011Т-М-ИТ3	011Т-М-СТ3	011Т-М-ИС3
011Т-М-К4	011Т-М-Т4	011Т-М-И4	011Т-М-С4	011Т-М-КТ4	011Т-М-КИ4	011Т-М-КС4	011Т-М-ИТ4	011Т-М-СТ4	011Т-М-ИС4
011Т-М-К5	011Т-М-Т5	011Т-М-И5	011Т-М-С5	011Т-М-КТ5	011Т-М-КИ5	011Т-М-КС5	011Т-М-ИТ5	011Т-М-СТ5	011Т-М-ИС5
011Т-М-К6	011Т-М-Т6	011Т-М-И6	011Т-М-С6	011Т-М-КТ6	011Т-М-КИ6	011Т-М-КС6	011Т-М-ИТ6	011Т-М-СТ6	011Т-М-ИС6

Где:

- вид обуви - 09Б - ботинки; 09С - сапоги; 09ПС - полусапоги; полусапожки; 0101Б - полуботинки; 011Т - туфли.
- половозрастные группы: М/Д - малолетская; ДШ - дошкольная; Ш - школьная (для девочек и мальчиков); Пд и Пм - подростковая (девичья и мальчиковая); Ж - женская; М - мужская.
- материал верха: - К-кожа; - Т-текстиль; - И-искусственная кожа.
- материал подкладки: - 1-кожа; - 2-натуральный мех; - 3-искусственный мех; - 4-текстиль; - 5-байка; - 6-искусственная кожа; - 0- без подкладки

8.4 Хранение обуви в потребительской упаковке или транспортной таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м.

8.5 Расстояние от хранящейся обуви до наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м.

8.6 Обувь при хранении должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.

9 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 Обувь показана для применения детям, подросткам и взрослым пациентам с умеренно выраженными деформациями нижних конечностей: плоскостопие, пяточные «шпоры», а также больным с начальной стадией сахарного диабета для:

- обеспечения рационального распределения давления по подошвенной поверхности стопы с учётом её индивидуальных анатомо-функциональных особенностей;

- восстановления или компенсации функции стояния и ходьбы;

- предотвращения травматизации мягких тканей стопы с целью профилактики гнойно-некротических осложнений и ранней ампутации стопы;

- профилактики или компенсации деформации костно-суставного аппарата стопы:

- при продольном плоскостопии;

- при комбинированном плоскостопии;

- при полой стопе;

- при распластанности переднего отдела стопы;

- при вальгусной, плоско-вальгусной стопе;

- при варусной, половарусной стопе;

- при эквинусной стопе;

- при отвисающей стопе;

- при паралитической стопе.

10 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

10.1 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Применение обуви не по медицинскому назначению.

10.2 ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Не выявлены.

11 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБУВИ

11.1 Ограничений по совместному применению обуви с другими медицинскими изделиями разрешенными к применению в установленном порядке на территории РФ не выявлено.

Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью 16 листа(ов).

Должность

ФИО **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

ООО «Альмида»

Подпись **Дубровин Д.А.**

"17" ноября 2020 г.

МП



Общество с ограниченной ответственностью «Альмида»
(ООО «Альмида»)

32.50.22.150

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Альмида»
Д.А. Дубровин
« 17 » августа 2020 г.



**Обувь ортопедическая малосложная
по ТУ 32.50.22-001-33010841-2019**

Руководство по эксплуатации (РЭ)

Выпуск 2

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

1.1 Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-33010841-2019 (далее по тексту обувь) в вариантах исполнения:

Половозрастная группа применения обуви	Вид обуви	Размеры, мм	Размер штихмассовый
1	2	3	4
Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД)	ботинки (09Б) сапоги (09С) полуботинки (010ПБ) туфли (011Т)	125-130-135-145-150-155-165	20-21-22-23-24-25-26
Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ)	ботинки (09Б) сапоги (09С) полуботинки (010ПБ) туфли (011Т)	170-175-185-190-195	27-28-29-30-31
Для школьников-девочек и школьников-мальчиков с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш)	ботинки (09Б) сапоги (09С) полусапоги, полусапожки (09ПС) полуботинки (010ПБ) туфли (011Т)	205-210-215-225-230-235-240	32-33-34-35-36-37
Подростковая девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пд)	ботинки (09Б) сапоги (09С) полусапоги, полусапожки (09ПС) полуботинки (010ПБ) туфли (011Т)	225-230-235-245-250-255	35-36-37-38-39-40
Подростковая мальчиковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пм)	ботинки (09Б) сапоги (09С) полусапоги, полусапожки (09ПС) полуботинки (010ПБ) туфли (011Т)	245-250-255-265-270-275	38-39-40-41-42-43
Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж)	ботинки (09Б) сапоги (09С) полусапоги, полусапожки (09ПС) полуботинки (010ПБ) туфли (011Т)	230- 235-245-250-255-265-270-275	36-37-38-39-40-41-42-43
Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М)	ботинки (09Б) сапоги (09С) полусапоги, полусапожки (09ПС) полуботинки (010ПБ) туфли (011Т)	255-265-270-275-285-290-295-305	40-41-42-43-44-45-46-47

2 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И РАЗРАБОТЧИКЕ

2.1 Разработка медицинского изделия "Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-33010841-2019 осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Альмида» (ООО «Альмида»)

Телефон/Факс: (495)-940-71-19, (496)-535-13-28

Адреса места производства медицинского изделия: 141205, Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, Московский проспект, дом № 55, корпус главный цех, комната 17.

E-mail almida@midisa.ru

3 НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ.

3.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

"Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-33010841-2019 предназначена для пользователей с ограничениями жизнедеятельности всех половозрастных групп при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп (плоскостопие, пяточные «шпоры», разные размеры стоп, укорочение нижней конечности с компенсацией до 3 см) приводящими к незначительным или умеренным функциональным нарушениям, в том числе и при начальной стадии диабетической патологии стоп.

Область применения – ортопедия.

4 ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 ОПИСАНИЕ

Обувь ортопедическая малосложная, серийно выпускаемая продукция, изготавливается летняя, зимняя, весенне-осенняя, круглосезонная и может быть использована для реабилитации инвалидов в условиях лечебных и лечебно-профилактических учреждений, а также в бытовых условиях.

В зависимости от сезонности обувь может быть изготовлена с утепленной подкладкой и без неё.

Для больных сахарным диабетом не допускается изготавливать обувь с открытой носочной частью и состоящую из ремешков.

Обувь малодетская и дошкольная изготавливается с закрытой пяточной частью.

Обувь является нестерильным медицинским изделием, не подлежащим стерилизации.

Перед эксплуатацией следует внимательно ознакомиться с данным руководством.

Не рекомендуется эксплуатация после истечения срока службы.

4.2 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обувь рассчитана для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре от минус 20 °С до 40 °С.

Срок службы обуви - не менее одного года, для детей инвалидов - не менее шести месяцев.

Срок сохраняемости обуви - не более шести месяцев, для детей инвалидов - не более одного месяца.

Обувь ремонтпригодна в течение срока службы.

Критериями непригодности обуви к носке являются деформация или нарушение целостности специальных деталей, указанных в п.2.3 настоящего руководства. Специальные детали обуви ремонту не подлежат.

4.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номенклатура (модели) обуви и её размеры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Половозрастная группа/размеры,мм.(см)									
Обувь малолетская с деформациями и дефектами стоп (МД/125(20) – 165(26))									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки малолетские (09Б)									
09Б- МД-К0	09Б- МД-Т0			09Б-МД- КТ0					
09Б- МД-К1	09Б- МД-Т1	09Б- МД-И1	09Б- МД-С1	09Б-МД- КТ1	09Б-МД- КИ1	09Б-МД- КС1	09Б-МД- ИТ1	09Б-МД- СТ1	09Б-МД- ИС1
09Б- МД-К2	09Б- МД-Т2	09Б- МД-И2	09Б- МД-С2	09Б-МД- КТ2	09Б-МД- КИ2	09Б-МД- КС2	09Б-МД- ИТ2	09Б-МД- СТ2	09Б-МД- ИС2
09Б- МД-К3	09Б- МД-Т3	09Б- МД-И3	09Б- МД-С3	09Б-МД- КТ3	09Б-МД- КИ3	09Б-МД- КС3	09Б-МД- ИТ3	09Б-МД- СТ3	09Б-МД- ИС3
09Б- МД-К4	09Б- МД-Т4	09Б- МД-И4	09Б- МД-С4	09Б-МД- КТ4	09Б-МД- КИ4	09Б-МД- КС4	09Б-МД- ИТ4	09Б-МД- СТ4	09Б-МД- ИС4
09Б- МД-К5	09Б- МД-Т5	09Б- МД-И5	09Б- МД-С5	09Б-МД- КТ5	09Б-МД- КИ5	09Б-МД- КС5	09Б-МД- ИТ5	09Б-МД- СТ5	09Б-МД- ИС5
Сапоги малолетские (09С)									
09С- МД-К0	09С- МД-Т0			09С-МД- КТ0					
09С- МД-К1	09С- МД-Т1	09С- МД-И1	09С- МД-С1	09С-МД- КТ1	09С-МД- КИ1	09С-МД- КС1	09С-МД- ИТ1	09С-МД- СТ1	09С-МД- ИС1
09С- МД-К2	09С- МД-Т2	09С- МД-И2	09С- МД-С2	09С-МД- КТ2	09С-МД- КИ2	09С-МД- КС2	09С-МД- ИТ2	09С-МД- СТ2	09С-МД- ИС2
09С- МД-К3	09С- МД-Т3	09С- МД-И3	09С- МД-С3	09С-МД- КТ3	09С-МД- КИ3	09С-МД- КС3	09С-МД- ИТ3	09С-МД- СТ3	09С-МД- ИС3
09С- МД-К4	09С- МД-Т4	09С- МД-И4	09С- МД-С4	09С-МД- КТ4	09С-МД- КИ4	09С-МД- КС4	09С-МД- ИТ4	09С-МД- СТ4	09С-МД- ИС4
09С- МД-К5	09С- МД-Т5	09С- МД-И5	09С- МД-С5	09С-МД- КТ5	09С-МД- КИ5	09С-МД- КС5	09С-МД- ИТ5	09С-МД- СТ5	09С-МД- ИС5

Полуботинки малюдетские (010ПБ))									
010ПБ-МД-К0	010ПБ-МД-Т0			010ПБ-МД-КТ0					
010ПБ-МД-К1	010ПБ-МД-Т1	010ПБ-МД-И1	010ПБ-МД-С1	010ПБ-МД-КТ1	010ПБ-МД-КИ1	010ПБ-МД-КС1	010ПБ-МД-ИТ1	010ПБ-МД-СТ1	010ПБ-МД-ИС1
010ПБ-МД-К2	010ПБ-МД-Т2	010ПБ-МД-И2	010ПБ-МД-С2	010ПБ-МД-КТ2	010ПБ-МД-КИ2	010ПБ-МД-КС2	010ПБ-МД-ИТ2	010ПБ-МД-СТ2	010ПБ-МД-ИС2
010ПБ-МД-К3	010ПБ-МД-Т3	010ПБ-МД-И3	010ПБ-МД-С3	010ПБ-МД-КТ3	010ПБ-МД-КИ3	010ПБ-МД-КС3	010ПБ-МД-ИТ3	010ПБ-МД-СТ3	010ПБ-МД-ИС3
010ПБ-МД-К4	010ПБ-МД-Т4	010ПБ-МД-И4	010ПБ-МД-С4	010ПБ-МД-КТ4	010ПБ-МД-КИ4	010ПБ-МД-КС4	010ПБ-МД-ИТ4	010ПБ-МД-СТ4	010ПБ-МД-ИС4
010ПБ-МД-К5	010ПБ-МД-Т5	010ПБ-МД-И5	010ПБ-МД-С5	010ПБ-МД-КТ5	010ПБ-МД-КИ5	010ПБ-МД-КС5	010ПБ-МД-ИТ5	010ПБ-МД-СТ5	010ПБ-МД-ИС5
Туфли малюдетские (011Т)									
011Т-МД-К0	011Т-МД-Т0			011Т-МД-КТ0					
011Т-МД-К1	011Т-МД-Т1	011Т-МД-И1	011Т-МД-С1	011Т-МД-КТ1	011Т-МД-КИ1	011Т-МД-КС1	011Т-МД-ИТ1	011Т-МД-СТ1	011Т-МД-ИС1
011Т-МД-К2	011Т-МД-Т2	011Т-МД-И2	011Т-МД-С2	011Т-МД-КТ2	011Т-МД-КИ2	011Т-МД-КС2	011Т-МД-ИТ2	011Т-МД-СТ2	011Т-МД-ИС2
011Т-МД-К3	011Т-МД-Т3	011Т-МД-И3	011Т-МД-С3	011Т-МД-КТ3	011Т-МД-КИ3	011Т-МД-КС3	011Т-МД-ИТ3	011Т-МД-СТ3	011Т-МД-ИС3
011Т-МД-К4	011Т-МД-Т4	011Т-МД-И4	011Т-МД-С4	011Т-МД-КТ4	011Т-МД-КИ4	011Т-МД-КС4	011Т-МД-ИТ4	011Т-МД-СТ4	011Т-МД-ИС4
011Т-МД-К5	011Т-МД-Т5	011Т-МД-И5	011Т-МД-С5	011Т-МД-КТ5	011Т-МД-КИ5	011Т-МД-КС5	011Т-МД-ИТ5	011Т-МД-СТ5	011Т-МД-ИС5
Обувь дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШУ)170(27) – 195(31)									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки дошкольные (09Б)									
09Б-ДШ-К0	09Б-ДШ-Т0			09Б-ДШ-КТ0					
09Б-ДШ-К1	09Б-ДШ-Т1	09Б-ДШ-И1	09Б-ДШ-С1	09Б-ДШ-КТ1	09Б-ДШ-КИ1	09Б-ДШ-КС1	09Б-ДШ-ИТ1	09Б-ДШ-СТ1	09Б-ДШ-ИС1
09Б-ДШ-К2	09Б-ДШ-Т2	09Б-ДШ-И2	09Б-ДШ-С2	09Б-ДШ-КТ2	09Б-ДШ-КИ2	09Б-ДШ-КС2	09Б-ДШ-ИТ2	09Б-ДШ-СТ2	09Б-ДШ-ИС2
09Б-ДШ-К3	09Б-ДШ-Т3	09Б-ДШ-И3	09Б-ДШ-С3	09Б-ДШ-КТ3	09Б-ДШ-КИ3	09Б-ДШ-КС3	09Б-ДШ-ИТ3	09Б-ДШ-СТ3	09Б-ДШ-ИС3
09Б-ДШ-К4	09Б-ДШ-Т4	09Б-ДШ-И4	09Б-ДШ-С4	09Б-ДШ-КТ4	09Б-ДШ-КИ4	09Б-ДШ-КС4	09Б-ДШ-ИТ4	09Б-ДШ-СТ4	09Б-ДШ-ИС4
09Б-ДШ-К5	09Б-ДШ-Т5	09Б-ДШ-И5	09Б-ДШ-С5	09Б-ДШ-КТ5	09Б-ДШ-КИ5	09Б-ДШ-КС5	09Б-ДШ-ИТ5	09Б-ДШ-СТ5	09Б-ДШ-ИС5

Сапоги дошкольные (09С)									
09С- ДШ-К0	09С- ДШ-Т0			09С-ДШ- КТ0					
09С- ДШ-К1	09С- ДШ-Т1	09С- ДШ-И1	09С- ДШ-С1	09С-ДШ- КТ1	09С-ДШ- КИ1	09С-ДШ- КС1	09С-ДШ- ИТ1	09С-ДШ- СТ1	09С-ДШ- ИС1
09С- ДШ-К2	09С- ДШ-Т2	09С- ДШ-И2	09С- ДШ-С2	09С-ДШ- КТ2	09С-ДШ- КИ2	09С-ДШ- КС2	09С-ДШ- ИТ2	09С-ДШ- СТ2	09С-ДШ- ИС2
09С- ДШ-К3	09С- ДШ-Т3	09С- ДШ-И3	09С- ДШ-С3	09С-ДШ- КТ3	09С-ДШ- КИ3	09С-ДШ- КС3	09С-ДШ- ИТ3	09С-ДШ- СТ3	09С-ДШ- ИС3
09С- ДШ-К4	09С- ДШ-Т4	09С- ДШ-И4	09С- ДШ-С4	09С-ДШ- КТ4	09С-ДШ- КИ4	09С-ДШ- КС4	09С-ДШ- ИТ4	09С-ДШ- СТ4	09С-ДШ- ИС4
09С- ДШ-К5	09С- ДШ-Т5	09С- ДШ-И5	09С- ДШ-С5	09С-ДШ- КТ5	09С-ДШ- КИ5	09С-ДШ- КС5	09С-ДШ- ИТ5	09С-ДШ- СТ5	09С-ДШ- ИС5
Полуботинки дошкольные (010ПБ)									
010ПБ- ДШ-К0	010ПБ- ДШ-Т0			010ПБ- ДШ-КТ0					
010ПБ- ДШ-К1	010ПБ- ДШ-Т1	010ПБ- ДШ-И1	010ПБ- ДШ-С1	010ПБ- ДШ-КТ1	010ПБ- ДШ-КИ1	010ПБ- ДШ-КС1	010ПБ- ДШ-ИТ1	010ПБ- ДШ-СТ1	010ПБ- ДШ-ИС1
010ПБ- ДШ-К2	010ПБ- ДШ-Т2	010ПБ- ДШ-И2	010ПБ- ДШ-С2	010ПБ- ДШ-КТ2	010ПБ- ДШ-КИ2	010ПБ- ДШ-КС2	010ПБ- ДШ-ИТ2	010ПБ- ДШ-СТ2	010ПБ- ДШ-ИС2
010ПБ- ДШ-К3	010ПБ- ДШ-Т3	010ПБ- ДШ-И3	010ПБ- ДШ-С3	010ПБ- ДШ-КТ3	010ПБ- ДШ-КИ3	010ПБ- ДШ-КС3	010ПБ- ДШ-ИТ3	010ПБ- ДШ-СТ3	010ПБ- ДШ-ИС3
010ПБ- ДШ-К4	010ПБ- ДШ-Т4	010ПБ- ДШ-И4	010ПБ- ДШ-С4	010ПБ- ДШ-КТ4	010ПБ- ДШ-КИ4	010ПБ- ДШ-КС4	010ПБ- ДШ-ИТ4	010ПБ- ДШ-СТ4	010ПБ- ДШ-ИС4
010ПБ- ДШ-К5	010ПБ- ДШ-Т5	010ПБ- ДШ-И5	010ПБ- ДШ-С5	010ПБ- ДШ-КТ5	010ПБ- ДШ-КИ5	010ПБ- ДШ-КС5	010ПБ- ДШ-ИТ5	010ПБ- ДШ-СТ5	010ПБ- ДШ-ИС5
Туфли дошкольные (011Т)									
011Т- ДШ-К0	011Т- ДШ-Т0			011Т- ДШ-КТ0					
011Т- ДШ-К1	011Т- ДШ-Т1	011Т- ДШ-И1	011Т- ДШ-С1	011Т- ДШ-КТ1	011Т- ДШ-КИ1	011Т- ДШ-КС1	011Т- ДШ-ИТ1	011Т- ДШ-СТ1	011Т-ДШ- ИС1
011Т- ДШ-К2	011Т- ДШ-Т2	011Т- ДШ-И2	011Т- ДШ-С2	011Т- ДШ-КТ2	011Т- ДШ-КИ2	011Т- ДШ-КС2	011Т- ДШ-ИТ2	011Т- ДШ-СТ2	011Т-ДШ- ИС2
011Т- ДШ-К3	011Т- ДШ-Т3	011Т- ДШ-И3	011Т- ДШ-С3	011Т- ДШ-КТ3	011Т- ДШ-КИ3	011Т- ДШ-КС3	011Т- ДШ-ИТ3	011Т- ДШ-СТ3	011Т-ДШ- ИС3
011Т- ДШ-К4	011Т- ДШ-Т4	011Т- ДШ-И4	011Т- ДШ-С4	011Т- ДШ-КТ4	011Т- ДШ-КИ4	011Т- ДШ-КС4	011Т- ДШ-ИТ4	011Т- ДШ-СТ4	011Т-ДШ- ИС4
011Т- ДШ-К5	011Т- ДШ-Т5	011Т- ДШ-И5	011Т- ДШ-С5	011Т- ДШ-КТ5	011Т- ДШ-КИ5	011Т- ДШ-КС5	011Т- ДШ-ИТ5	011Т- ДШ-СТ5	011Т-ДШ- ИС5

Обувь для школьников-девочек и школьников-мальчиков с деформациями,дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш)/205(32) – 240(37)									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки для школьников (09Б)									
09Б-Ш-К0	09Б-Ш-Т0	09Б-Ш-И0	09Б-Ш-С0	09Б-Ш-КТ0	09Б-Ш-КИ0	09Б-Ш-КС0	09Б-Ш-ИТ0	09Б-Ш-СТ0	09Б-Ш-ИС0
09Б-Ш-К1	09Б-Ш-Т1	09Б-Ш-И1	09Б-Ш-С1	09Б-Ш-КТ1	09Б-Ш-КИ1	09Б-Ш-КС1	09Б-Ш-ИТ1	09Б-Ш-СТ1	09Б-Ш-ИС1
09Б-Ш-К2	09Б-Ш-Т2	09Б-Ш-И2	09Б-Ш-С2	09Б-Ш-КТ2	09Б-Ш-КИ2	09Б-Ш-КС2	09Б-Ш-ИТ2	09Б-Ш-СТ2	09Б-Ш-ИС2
09Б-Ш-К3	09Б-Ш-Т3	09Б-Ш-И3	09Б-Ш-С3	09Б-Ш-КТ3	09Б-Ш-КИ3	09Б-Ш-КС3	09Б-Ш-ИТ3	09Б-Ш-СТ3	09Б-Ш-ИС3
09Б-Ш-К4	09Б-Ш-Т4	09Б-Ш-И4	09Б-Ш-С4	09Б-Ш-КТ4	09Б-Ш-КИ4	09Б-Ш-КС4	09Б-Ш-ИТ4	09Б-Ш-СТ4	09Б-Ш-ИС4
09Б-Ш-К5	09Б-Ш-Т5	09Б-Ш-И5	09Б-Ш-С5	09Б-Ш-КТ5	09Б-Ш-КИ5	09Б-Ш-КС5	09Б-Ш-ИТ5	09Б-Ш-СТ5	09Б-Ш-ИС5
09Б-Ш-К6	09Б-Ш-Т6	09Б-Ш-И6	09Б-Ш-С6	09Б-Ш-КТ6	09Б-Ш-КИ6	09Б-Ш-КС6	09Б-Ш-ИТ6	09Б-Ш-СТ6	09Б-Ш-ИС6
Сапоги для школьников (09С)									
09С-Ш-К0	09С-Ш-Т0	09С-Ш-И0	09С-Ш-С0	09С-Ш-КТ0	09С-Ш-КИ0	09С-Ш-КС0	09С-Ш-ИТ0	09С-Ш-СТ0	09С-Ш-ИС0
09С-Ш-К1	09С-Ш-Т1	09С-Ш-И1	09С-Ш-С1	09С-Ш-КТ1	09С-Ш-КИ1	09С-Ш-КС1	09С-Ш-ИТ1	09С-Ш-СТ1	09С-Ш-ИС1
09С-Ш-К2	09С-Ш-Т2	09С-Ш-И2	09С-Ш-С2	09С-Ш-КТ2	09С-Ш-КИ2	09С-Ш-КС2	09С-Ш-ИТ2	09С-Ш-СТ2	09С-Ш-ИС2
09С-Ш-К3	09С-Ш-Т3	09С-Ш-И3	09С-Ш-С3	09С-Ш-КТ3	09С-Ш-КИ3	09С-Ш-КС3	09С-Ш-ИТ3	09С-Ш-СТ3	09С-Ш-ИС3
09С-Ш-К4	09С-Ш-Т4	09С-Ш-И4	09С-Ш-С4	09С-Ш-КТ4	09С-Ш-КИ4	09С-Ш-КС4	09С-Ш-ИТ4	09С-Ш-СТ4	09С-Ш-ИС4
09С-Ш-К5	09С-Ш-Т5	09С-Ш-И5	09С-Ш-С5	09С-Ш-КТ5	09С-Ш-КИ5	09С-Ш-КС5	09С-Ш-ИТ5	09С-Ш-СТ5	09С-Ш-ИС5
09С-Ш-К6	09С-Ш-Т6	09С-Ш-И6	09С-Ш-С6	09С-Ш-КТ6	09С-Ш-КИ6	09С-Ш-КС6	09С-Ш-ИТ6	09С-Ш-СТ6	09С-Ш-ИС6
Полусапоги, полусапожки для школьников (09ПС)									
09ПС-Ш-К0	09ПС-Ш-Т0	09ПС-Ш-И0	09ПС-Ш-С0	09ПС-Ш-КТ0	09ПС-Ш-КИ0	09ПС-Ш-КС0	09ПС-Ш-ИТ0	09ПС-Ш-СТ0	09ПС-Ш-ИС0
09ПС-Ш-К1	09ПС-Ш-Т1	09ПС-Ш-И1	09ПС-Ш-С1	09ПС-Ш-КТ1	09ПС-Ш-КИ1	09ПС-Ш-КС1	09ПС-Ш-ИТ1	09ПС-Ш-СТ1	09ПС-Ш-ИС1
09ПС-Ш-К2	09ПС-Ш-Т2	09ПС-Ш-И2	09ПС-Ш-С2	09ПС-Ш-КТ2	09ПС-Ш-КИ2	09ПС-Ш-КС2	09ПС-Ш-ИТ2	09ПС-Ш-СТ2	09ПС-Ш-ИС2
09ПС-Ш-К3	09ПС-Ш-Т3	09ПС-Ш-И3	09ПС-Ш-С3	09ПС-Ш-КТ3	09ПС-Ш-КИ3	09ПС-Ш-КС3	09ПС-Ш-ИТ3	09ПС-Ш-СТ3	09ПС-Ш-ИС3
09ПС-Ш-К4	09ПС-Ш-Т4	09ПС-Ш-И4	09ПС-Ш-С4	09ПС-Ш-КТ4	09ПС-Ш-КИ4	09ПС-Ш-КС4	09ПС-Ш-ИТ4	09ПС-Ш-СТ4	09ПС-Ш-ИС4
09ПС-Ш-К5	09ПС-Ш-Т5	09ПС-Ш-И5	09ПС-Ш-С5	09ПС-Ш-КТ5	09ПС-Ш-КИ5	09ПС-Ш-КС5	09ПС-Ш-ИТ5	09ПС-Ш-СТ5	09ПС-Ш-ИС5
09ПС-Ш-К6	09ПС-Ш-Т6	09ПС-Ш-И6	09ПС-Ш-С6	09ПС-Ш-КТ6	09ПС-Ш-КИ6	09ПС-Ш-КС6	09ПС-Ш-ИТ6	09ПС-Ш-СТ6	09ПС-Ш-ИС6

Подуботинки для школьников (010ПБ)									
010ПБ-Ш-К0	010ПБ-Ш-Т0	010ПБ-Ш-И0	010ПБ-Ш-С0	010ПБ-Ш-КТ0	010ПБ-Ш-КИ0	010ПБ-Ш-КС0	010ПБ-Ш-ИТ0	010ПБ-Ш-СТ0	010ПБ-Ш-ИС0
010ПБ-Ш-К1	010ПБ-Ш-Т1	010ПБ-Ш-И1	010ПБ-Ш-С1	010ПБ-Ш-КТ1	010ПБ-Ш-КИ1	010ПБ-Ш-КС1	010ПБ-Ш-ИТ1	010ПБ-Ш-СТ1	010ПБ-Ш-ИС1
010ПБ-Ш-К2	010ПБ-Ш-Т2	010ПБ-Ш-И2	010ПБ-Ш-С2	010ПБ-Ш-КТ2	010ПБ-Ш-КИ2	010ПБ-Ш-КС2	010ПБ-Ш-ИТ2	010ПБ-Ш-СТ2	010ПБ-Ш-ИС2
010ПБ-Ш-К3	010ПБ-Ш-Т3	010ПБ-Ш-И3	010ПБ-Ш-С3	010ПБ-Ш-КТ3	010ПБ-Ш-КИ3	010ПБ-Ш-КС3	010ПБ-Ш-ИТ3	010ПБ-Ш-СТ3	010ПБ-Ш-ИС3
010ПБ-Ш-К4	010ПБ-Ш-Т4	010ПБ-Ш-И4	010ПБ-Ш-С4	010ПБ-Ш-КТ4	010ПБ-Ш-КИ4	010ПБ-Ш-КС4	010ПБ-Ш-ИТ4	010ПБ-Ш-СТ4	010ПБ-Ш-ИС4
010ПБ-Ш-К5	010ПБ-Ш-Т5	010ПБ-Ш-И5	010ПБ-Ш-С5	010ПБ-Ш-КТ5	010ПБ-Ш-КИ5	010ПБ-Ш-КС5	010ПБ-Ш-ИТ5	010ПБ-Ш-СТ5	010ПБ-Ш-ИС5
010ПБ-Ш-К6	010ПБ-Ш-Т6	010ПБ-Ш-И6	010ПБ-Ш-С6	010ПБ-Ш-КТ6	010ПБ-Ш-КИ6	010ПБ-Ш-КС6	010ПБ-Ш-ИТ6	010ПБ-Ш-СТ6	010ПБ-Ш-ИС6
Туфли для школьников (011Т)									
011Т-Ш-К0	011Т-Ш-Т0	011Т-Ш-И0	011Т-Ш-С0	011Т-Ш-КТ0	011Т-Ш-КИ0	011Т-Ш-КС0	011Т-Ш-ИТ0	011Т-Ш-СТ0	011Т-Ш-ИС0
011Т-Ш-К1	011Т-Ш-Т1	011Т-Ш-И1	011Т-Ш-С1	011Т-Ш-КТ1	011Т-Ш-КИ1	011Т-Ш-КС1	011Т-Ш-ИТ1	011Т-Ш-СТ1	011Т-Ш-ИС1
011Т-Ш-К2	011Т-Ш-Т2	011Т-Ш-И2	011Т-Ш-С2	011Т-Ш-КТ2	011Т-Ш-КИ2	011Т-Ш-КС2	011Т-Ш-ИТ2	011Т-Ш-СТ2	011Т-Ш-ИС2
011Т-Ш-К3	011Т-Ш-Т3	011Т-Ш-И3	011Т-Ш-С3	011Т-Ш-КТ3	011Т-Ш-КИ3	011Т-Ш-КС3	011Т-Ш-ИТ3	011Т-Ш-СТ3	011Т-Ш-ИС3
011Т-Ш-К4	011Т-Ш-Т4	011Т-Ш-И4	011Т-Ш-С4	011Т-Ш-КТ4	011Т-Ш-КИ4	011Т-Ш-КС4	011Т-Ш-ИТ4	011Т-Ш-СТ4	011Т-Ш-ИС4
011Т-Ш-К5	011Т-Ш-Т5	011Т-Ш-И5	011Т-Ш-С5	011Т-Ш-КТ5	011Т-Ш-КИ5	011Т-Ш-КС5	011Т-Ш-ИТ5	011Т-Ш-СТ5	011Т-Ш-ИС5
011Т-Ш-К6	011Т-Ш-Т6	011Т-Ш-И6	011Т-Ш-С6	011Т-Ш-КТ6	011Т-Ш-КИ6	011Т-Ш-КС6	011Т-Ш-ИТ6	011Т-Ш-СТ6	011Т-Ш-ИС6
Обувь подростковая девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ПлУ225(35) – 255(40))									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки подростковые девичьи (09Б)									
09Б-Пл-К0	09Б-Пл-Т0	09Б-Пл-И0	09Б-Пл-С0	09Б-Пл-КТ0	09Б-Пл-КИ0	09Б-Пл-КС0	09Б-Пл-ИТ0	09Б-Пл-СТ0	09Б-Пл-ИС0
09Б-Пл-К1	09Б-Пл-Т1	09Б-Пл-И1	09Б-Пл-С1	09Б-Пл-КТ1	09Б-Пл-КИ1	09Б-Пл-КС1	09Б-Пл-ИТ1	09Б-Пл-СТ1	09Б-Пл-ИС1
09Б-Пл-К2	09Б-Пл-Т2	09Б-Пл-И2	09Б-Пл-С2	09Б-Пл-КТ2	09Б-Пл-КИ2	09Б-Пл-КС2	09Б-Пл-ИТ2	09Б-Пл-СТ2	09Б-Пл-ИС2
09Б-Пл-К3	09Б-Пл-Т3	09Б-Пл-И3	09Б-Пл-С3	09Б-Пл-КТ3	09Б-Пл-КИ3	09Б-Пл-КС3	09Б-Пл-ИТ3	09Б-Пл-СТ3	09Б-Пл-ИС3
09Б-Пл-К4	09Б-Пл-Т4	09Б-Пл-И4	09Б-Пл-С4	09Б-Пл-КТ4	09Б-Пл-КИ4	09Б-Пл-КС4	09Б-Пл-ИТ4	09Б-Пл-СТ4	09Б-Пл-ИС4
09Б-Пл-К5	09Б-Пл-Т5	09Б-Пл-И5	09Б-Пл-С5	09Б-Пл-КТ5	09Б-Пл-КИ5	09Б-Пл-КС5	09Б-Пл-ИТ5	09Б-Пл-СТ5	09Б-Пл-ИС5
09Б-Пл-К6	09Б-Пл-Т6	09Б-Пл-И6	09Б-Пл-С6	09Б-Пл-КТ6	09Б-Пл-КИ6	09Б-Пл-КС6	09Б-Пл-ИТ6	09Б-Пл-СТ6	09Б-Пл-ИС6

Сапоги подростковые девичьи (09С)									
09С-Пд-К0	09С-Пд-Т0	09С-Пд-И0	09С-Пд-С0	09С-Пд-КТ0	09С-Пд-КИ0	09С-Пд-КС0	09С-Пд-ИТ0	09С-Пд-СТ0	09С-Пд-ИС0
09С-Пд-К1	09С-Пд-Т1	09С-Пд-И1	09С-Пд-С1	09С-Пд-КТ1	09С-Пд-КИ1	09С-Пд-КС1	09С-Пд-ИТ1	09С-Пд-СТ1	09С-Пд-ИС1
09С-Пд-К2	09С-Пд-Т2	09С-Пд-И2	09С-Пд-С2	09С-Пд-КТ2	09С-Пд-КИ2	09С-Пд-КС2	09С-Пд-ИТ2	09С-Пд-СТ2	09С-Пд-ИС2
09С-Пд-К3	09С-Пд-Т3	09С-Пд-И3	09С-Пд-С3	09С-Пд-КТ3	09С-Пд-КИ3	09С-Пд-КС3	09С-Пд-ИТ3	09С-Пд-СТ3	09С-Пд-ИС3
09С-Пд-К4	09С-Пд-Т4	09С-Пд-И4	09С-Пд-С4	09С-Пд-КТ4	09С-Пд-КИ4	09С-Пд-КС4	09С-Пд-ИТ4	09С-Пд-СТ4	09С-Пд-ИС4
09С-Пд-К5	09С-Пд-Т5	09С-Пд-И5	09С-Пд-С5	09С-Пд-КТ5	09С-Пд-КИ5	09С-Пд-КС5	09С-Пд-ИТ5	09С-Пд-СТ5	09С-Пд-ИС5
09С-Пд-К6	09С-Пд-Т6	09С-Пд-И6	09С-Пд-С6	09С-Пд-КТ6	09С-Пд-КИ6	09С-Пд-КС6	09С-Пд-ИТ6	09С-Пд-СТ6	09С-Пд-ИС6
Полусапоги, полусапожки подростковые девичьи (09ПС)									
09ПС-Пд-К0	09ПС-Пд-Т0	09ПС-Пд-И0	09ПС-Пд-С0	09ПС-Пд-КТ0	09ПС-Пд-КИ0	09ПС-Пд-КС0	09ПС-Пд-ИТ0	09ПС-Пд-СТ0	09ПС-Пд-ИС0
09ПС-Пд-К1	09ПС-Пд-Т1	09ПС-Пд-И1	09ПС-Пд-С1	09ПС-Пд-КТ1	09ПС-Пд-КИ1	09ПС-Пд-КС1	09ПС-Пд-ИТ1	09ПС-Пд-СТ1	09ПС-Пд-ИС1
09ПС-Пд-К2	09ПС-Пд-Т2	09ПС-Пд-И2	09ПС-Пд-С2	09ПС-Пд-КТ2	09ПС-Пд-КИ2	09ПС-Пд-КС2	09ПС-Пд-ИТ2	09ПС-Пд-СТ2	09ПС-Пд-ИС2
09ПС-Пд-К3	09ПС-Пд-Т3	09ПС-Пд-И3	09ПС-Пд-С3	09ПС-Пд-КТ3	09ПС-Пд-КИ3	09ПС-Пд-КС3	09ПС-Пд-ИТ3	09ПС-Пд-СТ3	09ПС-Пд-ИС3
09ПС-Пд-К4	09ПС-Пд-Т4	09ПС-Пд-И4	09ПС-Пд-С4	09ПС-Пд-КТ4	09ПС-Пд-КИ4	09ПС-Пд-КС4	09ПС-Пд-ИТ4	09ПС-Пд-СТ4	09ПС-Пд-ИС4
09ПС-Пд-К5	09ПС-Пд-Т5	09ПС-Пд-И5	09ПС-Пд-С5	09ПС-Пд-КТ5	09ПС-Пд-КИ5	09ПС-Пд-КС5	09ПС-Пд-ИТ5	09ПС-Пд-СТ5	09ПС-Пд-ИС5
09ПС-Пд-К6	09ПС-Пд-Т6	09ПС-Пд-И6	09ПС-Пд-С6	09ПС-Пд-КТ6	09ПС-Пд-КИ6	09ПС-Пд-КС6	09ПС-Пд-ИТ6	09ПС-Пд-СТ6	09ПС-Пд-ИС6
Полуботинки подростковые девичьи (010ПБ)									
010ПБ-Пд-К0	010ПБ-Пд-Т0	010ПБ-Пд-И0	010ПБ-Пд-С0	010ПБ-Пд-КТ0	010ПБ-Пд-КИ0	010ПБ-Пд-КС0	010ПБ-Пд-ИТ0	010ПБ-Пд-СТ0	010ПБ-Пд-ИС0
010ПБ-Пд-К1	010ПБ-Пд-Т1	010ПБ-Пд-И1	010ПБ-Пд-С1	010ПБ-Пд-КТ1	010ПБ-Пд-КИ1	010ПБ-Пд-КС1	010ПБ-Пд-ИТ1	010ПБ-Пд-СТ1	010ПБ-Пд-ИС1
010ПБ-Пд-К2	010ПБ-Пд-Т2	010ПБ-Пд-И2	010ПБ-Пд-С2	010ПБ-Пд-КТ2	010ПБ-Пд-КИ2	010ПБ-Пд-КС2	010ПБ-Пд-ИТ2	010ПБ-Пд-СТ2	010ПБ-Пд-ИС2
010ПБ-Пд-К3	010ПБ-Пд-Т3	010ПБ-Пд-И3	010ПБ-Пд-С3	010ПБ-Пд-КТ3	010ПБ-Пд-КИ3	010ПБ-Пд-КС3	010ПБ-Пд-ИТ3	010ПБ-Пд-СТ3	010ПБ-Пд-ИС3
010ПБ-Пд-К4	010ПБ-Пд-Т4	010ПБ-Пд-И4	010ПБ-Пд-С4	010ПБ-Пд-КТ4	010ПБ-Пд-КИ4	010ПБ-Пд-КС4	010ПБ-Пд-ИТ4	010ПБ-Пд-СТ4	010ПБ-Пд-ИС4
010ПБ-Пд-К5	010ПБ-Пд-Т5	010ПБ-Пд-И5	010ПБ-Пд-С5	010ПБ-Пд-КТ5	010ПБ-Пд-КИ5	010ПБ-Пд-КС5	010ПБ-Пд-ИТ5	010ПБ-Пд-СТ5	010ПБ-Пд-ИС5
010ПБ-Пд-К6	010ПБ-Пд-Т6	010ПБ-Пд-И6	010ПБ-Пд-С6	010ПБ-Пд-КТ6	010ПБ-Пд-КИ6	010ПБ-Пд-КС6	010ПБ-Пд-ИТ6	010ПБ-Пд-СТ6	010ПБ-Пд-ИС6

Туфли подростковые девичьи (011Т)									
011Т-Пд-К0	011Т-Пд-Т0	011Т-Пд-И0	011Т-Пд-С0	011Т-Пд-КТ0	011Т-Пд-КИ0	011Т-Пд-КС0	011Т-Пд-ИТ0	011Т-Пд-СТ0	011Т-Пд-ИС0
011Т-Пд-К1	011Т-Пд-Т1	011Т-Пд-И1	011Т-Пд-С1	011Т-Пд-КТ1	011Т-Пд-КИ1	011Т-Пд-КС1	011Т-Пд-ИТ1	011Т-Пд-СТ1	011Т-Пд-ИС1
011Т-Пд-К2	011Т-Пд-Т2	011Т-Пд-И2	011Т-Пд-С2	011Т-Пд-КТ2	011Т-Пд-КИ2	011Т-Пд-КС2	011Т-Пд-ИТ2	011Т-Пд-СТ2	011Т-Пд-ИС2
011Т-Пд-К3	011Т-Пд-Т3	011Т-Пд-И3	011Т-Пд-С3	011Т-Пд-КТ3	011Т-Пд-КИ3	011Т-Пд-КС3	011Т-Пд-ИТ3	011Т-Пд-СТ3	011Т-Пд-ИС3
011Т-Пд-К4	011Т-Пд-Т4	011Т-Пд-И4	011Т-Пд-С4	011Т-Пд-КТ4	011Т-Пд-КИ4	011Т-Пд-КС4	011Т-Пд-ИТ4	011Т-Пд-СТ4	011Т-Пд-ИС4
011Т-Пд-К5	011Т-Пд-Т5	011Т-Пд-И5	011Т-Пд-С5	011Т-Пд-КТ5	011Т-Пд-КИ5	011Т-Пд-КС5	011Т-Пд-ИТ5	011Т-Пд-СТ5	011Т-Пд-ИС5
011Т-Пд-К6	011Т-Пд-Т6	011Т-Пд-И6	011Т-Пд-С6	011Т-Пд-КТ6	011Т-Пд-КИ6	011Т-Пд-КС6	011Т-Пд-ИТ6	011Т-Пд-СТ6	011Т-Пд-ИС6
Обувь подростковая мальчиковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пм)/245(38) – 275(43)									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки подростковые мальчиковые (09Б)									
09Б-Пм-К0	09Б-Пм-Т0	09Б-Пм-И0	09Б-Пм-С0	09Б-Пм-КТ0	09Б-Пм-КИ0	09Б-Пм-КС0	09Б-Пм-ИТ0	09Б-Пм-СТ0	09Б-Пм-ИС0
09Б-Пм-К1	09Б-Пм-Т1	09Б-Пм-И1	09Б-Пм-С1	09Б-Пм-КТ1	09Б-Пм-КИ1	09Б-Пм-КС1	09Б-Пм-ИТ1	09Б-Пм-СТ1	09Б-Пм-ИС1
09Б-Пм-К2	09Б-Пм-Т2	09Б-Пм-И2	09Б-Пм-С2	09Б-Пм-КТ2	09Б-Пм-КИ2	09Б-Пм-КС2	09Б-Пм-ИТ2	09Б-Пм-СТ2	09Б-Пм-ИС2
09Б-Пм-К3	09Б-Пм-Т3	09Б-Пм-И3	09Б-Пм-С3	09Б-Пм-КТ3	09Б-Пм-КИ3	09Б-Пм-КС3	09Б-Пм-ИТ3	09Б-Пм-СТ3	09Б-Пм-ИС3
09Б-Пм-К4	09Б-Пм-Т4	09Б-Пм-И4	09Б-Пм-С4	09Б-Пм-КТ4	09Б-Пм-КИ4	09Б-Пм-КС4	09Б-Пм-ИТ4	09Б-Пм-СТ4	09Б-Пм-ИС4
09Б-Пм-К5	09Б-Пм-Т5	09Б-Пм-И5	09Б-Пм-С5	09Б-Пм-КТ5	09Б-Пм-КИ5	09Б-Пм-КС5	09Б-Пм-ИТ5	09Б-Пм-СТ5	09Б-Пм-ИС5
09Б-Пм-К6	09Б-Пм-Т6	09Б-Пм-И6	09Б-Пм-С6	09Б-Пм-КТ6	09Б-Пм-КИ6	09Б-Пм-КС6	09Б-Пм-ИТ6	09Б-Пм-СТ6	09Б-Пм-ИС6
Сапоги подростковые мальчиковые (09С)									
09С-Пм-К0	09С-Пм-Т0	09С-Пм-И0	09С-Пм-С0	09С-Пм-КТ0	09С-Пм-КИ0	09С-Пм-КС0	09С-Пм-ИТ0	09С-Пм-СТ0	09С-Пм-ИС0
09С-Пм-К1	09С-Пм-Т1	09С-Пм-И1	09С-Пм-С1	09С-Пм-КТ1	09С-Пм-КИ1	09С-Пм-КС1	09С-Пм-ИТ1	09С-Пм-СТ1	09С-Пм-ИС1
09С-Пм-К2	09С-Пм-Т2	09С-Пм-И2	09С-Пм-С2	09С-Пм-КТ2	09С-Пм-КИ2	09С-Пм-КС2	09С-Пм-ИТ2	09С-Пм-СТ2	09С-Пм-ИС2
09С-Пм-К3	09С-Пм-Т3	09С-Пм-И3	09С-Пм-С3	09С-Пм-КТ3	09С-Пм-КИ3	09С-Пм-КС3	09С-Пм-ИТ3	09С-Пм-СТ3	09С-Пм-ИС3
09С-Пм-К4	09С-Пм-Т4	09С-Пм-И4	09С-Пм-С4	09С-Пм-КТ4	09С-Пм-КИ4	09С-Пм-КС4	09С-Пм-ИТ4	09С-Пм-СТ4	09С-Пм-ИС4
09С-Пм-К5	09С-Пм-Т5	09С-Пм-И5	09С-Пм-С5	09С-Пм-КТ5	09С-Пм-КИ5	09С-Пм-КС5	09С-Пм-ИТ5	09С-Пм-СТ5	09С-Пм-ИС5
09С-Пм-К6	09С-Пм-Т6	09С-Пм-И6	09С-Пм-С6	09С-Пм-КТ6	09С-Пм-КИ6	09С-Пм-КС6	09С-Пм-ИТ6	09С-Пм-СТ6	09С-Пм-ИС6

Полусапоги, полусапожки подростковые мальчиковые (09ПС)									
09ПС-Пм-К0	09ПС-Пм-Т0	09ПС-Пм-И0	09ПС-Пм-С0	09ПС-Пм-КТ0	09ПС-Пм-КИ0	09ПС-Пм-КС0	09ПС-Пм-ИТ0	09ПС-Пм-СТ0	09ПС-Пм-ИС0
09ПС-Пм-К1	09ПС-Пм-Т1	09ПС-Пм-И1	09ПС-Пм-С1	09ПС-Пм-КТ1	09ПС-Пм-КИ1	09ПС-Пм-КС1	09ПС-Пм-ИТ1	09ПС-Пм-СТ1	09ПС-Пм-ИС1
09ПС-Пм-К2	09ПС-Пм-Т2	09ПС-Пм-И2	09ПС-Пм-С2	09ПС-Пм-КТ2	09ПС-Пм-КИ2	09ПС-Пм-КС2	09ПС-Пм-ИТ2	09ПС-Пм-СТ2	09ПС-Пм-ИС2
09ПС-Пм-К3	09ПС-Пм-Т3	09ПС-Пм-И3	09ПС-Пм-С3	09ПС-Пм-КТ3	09ПС-Пм-КИ3	09ПС-Пм-КС3	09ПС-Пм-ИТ3	09ПС-Пм-СТ3	09ПС-Пм-ИС3
09ПС-Пм-К4	09ПС-Пм-Т4	09ПС-Пм-И4	09ПС-Пм-С4	09ПС-Пм-КТ4	09ПС-Пм-КИ4	09ПС-Пм-КС4	09ПС-Пм-ИТ4	09ПС-Пм-СТ4	09СП-Пм-ИС4
09ПС-Пм-К5	09ПС-Пм-Т5	09ПС-Пм-И5	09ПС-Пм-С5	09ПС-Пм-КТ5	09ПС-Пм-КИ5	09ПС-Пм-КС5	09ПС-Пм-ИТ5	09ПС-Пм-СТ5	09ПС-Пм-ИС5
09ПС-Пм-К6	09ПС-Пм-Т6	09ПС-Пм-И6	09ПС-Пм-С6	09ПС-Пм-КТ6	09ПС-Пм-КИ6	09ПС-Пм-КС6	09ПС-Пм-ИТ6	09ПС-Пм-СТ6	09ПС-Пм-ИС6
Полуботинки подростковые мальчиковые (010ПБ)									
010ПБ-Пм-К0	010ПБ-Пм-Т0	010ПБ-Пм-И0	010ПБ-Пм-С0	010ПБ-Пм-КТ0	010ПБ-Пм-КИ0	010ПБ-Пм-КС0	010ПБ-Пм-ИТ0	010ПБ-Пм-СТ0	010ПБ-Пм-ИС0
010ПБ-Пм-К1	010ПБ-Пм-Т1	010ПБ-Пм-И1	010ПБ-Пм-С1	010ПБ-Пм-КТ1	010ПБ-Пм-КИ1	010ПБ-Пм-КС1	010ПБ-Пм-ИТ1	010ПБ-Пм-СТ1	010ПБ-Пм-ИС1
010ПБ-Пм-К2	010ПБ-Пм-Т2	010ПБ-Пм-И2	010ПБ-Пм-С2	010ПБ-Пм-КТ2	010ПБ-Пм-КИ2	010ПБ-Пм-КС2	010ПБ-Пм-ИТ2	010ПБ-Пм-СТ2	010ПБ-Пм-ИС2
010ПБ-Пм-К3	010ПБ-Пм-Т3	010ПБ-Пм-И3	010ПБ-Пм-С3	010ПБ-Пм-КТ3	010ПБ-Пм-КИ3	010ПБ-Пм-КС3	010ПБ-Пм-ИТ3	010ПБ-Пм-СТ3	010ПБ-Пм-ИС3
010ПБ-Пм-К4	010ПБ-Пм-Т4	010ПБ-Пм-И4	010ПБ-Пм-С4	010ПБ-Пм-КТ4	010ПБ-Пм-КИ4	010ПБ-Пм-КС4	010ПБ-Пм-ИТ4	010ПБ-Пм-СТ4	010ПБ-Пм-ИС4
010ПБ-Пм-К5	010ПБ-Пм-Т5	010ПБ-Пм-И5	010ПБ-Пм-С5	010ПБ-Пм-КТ5	010ПБ-Пм-КИ5	010ПБ-Пм-КС5	010ПБ-Пм-ИТ5	010ПБ-Пм-СТ5	010ПБ-Пм-ИС5
010ПБ-Пм-К6	010ПБ-Пм-Т6	010ПБ-Пм-И6	010ПБ-Пм-С6	010ПБ-Пм-КТ6	010ПБ-Пм-КИ6	010ПБ-Пм-КС6	010ПБ-Пм-ИТ6	010ПБ-Пм-СТ6	010ПБ-Пм-ИС6
Туфли подростковые мальчиковые (011Т)									
011Т-Пм-К0	011Т-Пм-Т0	011Т-Пм-И0	011Т-Пм-С0	011Т-Пм-КТ0	011Т-Пм-КИ0	011Т-Пм-КС0	011Т-Пм-ИТ0	011Т-Пм-СТ0	011Т-Пм-ИС0
011Т-Пм-К1	011Т-Пм-Т1	011Т-Пм-И1	011Т-Пм-С1	011Т-Пм-КТ1	011Т-Пм-КИ1	011Т-Пм-КС1	011Т-Пм-ИТ1	011Т-Пм-СТ1	011Т-Пм-ИС1
011Т-Пм-К2	011Т-Пм-Т2	011Т-Пм-И2	011Т-Пм-С2	011Т-Пм-КТ2	011Т-Пм-КИ2	011Т-Пм-КС2	011Т-Пм-ИТ2	011Т-Пм-СТ2	011Т-Пм-ИС2
011Т-Пм-К3	011Т-Пм-Т3	011Т-Пм-И3	011Т-Пм-С3	011Т-Пм-КТ3	011Т-Пм-КИ3	011Т-Пм-КС3	011Т-Пм-ИТ3	011Т-Пм-СТ3	011Т-Пм-ИС3
011Т-Пм-К4	011Т-Пм-Т4	011Т-Пм-И4	011Т-Пм-С4	011Т-Пм-КТ4	011Т-Пм-КИ4	011Т-Пм-КС4	011Т-Пм-ИТ4	011Т-Пм-СТ4	011Т-Пм-ИС4
011Т-Пм-К5	011Т-Пм-Т5	011Т-Пм-И5	011Т-Пм-С5	011Т-Пм-КТ5	011Т-Пм-КИ5	011Т-Пм-КС5	011Т-Пм-ИТ5	011Т-Пм-СТ5	011Т-Пм-ИС5
011Т-Пм-К6	011Т-Пм-Т6	011Т-Пм-И6	011Т-Пм-С6	011Т-Пм-КТ6	011Т-Пм-КИ6	011Т-Пм-КС6	011Т-Пм-ИТ6	011Т-Пм-СТ6	011Т-Пм-ИС6

Обувь женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом Ж/230(36) – 275(43)									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожи (ИС)
Ботинки женские (09Б)									
09Б-Ж-К0	09Б-Ж-Т0	09Б-Ж-И0	09Б-Ж-С0	09Б-Ж-КТ0	09Б-Ж-КИ0	09Б-Ж-КС0	09Б-Ж-ИТ0	09Б-Ж-СТ0	09Б-Ж-ИС0
09Б-Ж-К1	09Б-Ж-Т1	09Б-Ж-И1	09Б-Ж-С1	09Б-Ж-КТ1	09Б-Ж-КИ1	09Б-Ж-КС1	09Б-Ж-ИТ1	09Б-Ж-СТ1	09Б-Ж-ИС1
09Б-Ж-К2	09Б-Ж-Т2	09Б-Ж-И2	09Б-Ж-С2	09Б-Ж-КТ2	09Б-Ж-КИ2	09Б-Ж-КС2	09Б-Ж-ИТ2	09Б-Ж-СТ2	09Б-Ж-ИС2
09Б-Ж-К3	09Б-Ж-Т3	09Б-Ж-И3	09Б-Ж-С3	09Б-Ж-КТ3	09Б-Ж-КИ3	09Б-Ж-КС3	09Б-Ж-ИТ3	09Б-Ж-СТ3	09Б-Ж-ИС3
09Б-Ж-К4	09Б-Ж-Т4	09Б-Ж-И4	09Б-Ж-С4	09Б-Ж-КТ4	09Б-Ж-КИ4	09Б-Ж-КС4	09Б-Ж-ИТ4	09Б-Ж-СТ4	09Б-Ж-ИС4
09Б-Ж-К5	09Б-Ж-Т5	09Б-Ж-И5	09Б-Ж-С5	09Б-Ж-КТ5	09Б-Ж-КИ5	09Б-Ж-КС5	09Б-Ж-ИТ5	09Б-Ж-СТ5	09Б-Ж-ИС5
09Б-Ж-К6	09Б-Ж-Т6	09Б-Ж-И6	09Б-Ж-С6	09Б-Ж-КТ6	09Б-Ж-КИ6	09Б-Ж-КС6	09Б-Ж-ИТ6	09Б-Ж-СТ6	09Б-Ж-ИС6
Сапоги женские (09С)									
09С-Ж-К0	09С-Ж-Т0	09С-Ж-И0	09С-Ж-С0	09С-Ж-КТ0	09С-Ж-КИ0	09С-Ж-КС0	09С-Ж-ИТ0	09С-Ж-СТ0	09С-Ж-ИС0
09С-Ж-К1	09С-Ж-Т1	09С-Ж-И1	09С-Ж-С1	09С-Ж-КТ1	09С-Ж-КИ1	09С-Ж-КС1	09С-Ж-ИТ1	09С-Ж-СТ1	09С-Ж-ИС1
09С-Ж-К2	09С-Ж-Т2	09С-Ж-И2	09С-Ж-С2	09С-Ж-КТ2	09С-Ж-КИ2	09С-Ж-КС2	09С-Ж-ИТ2	09С-Ж-СТ2	09С-Ж-ИС2
09С-Ж-К3	09С-Ж-Т3	09С-Ж-И3	09С-Ж-С3	09С-Ж-КТ3	09С-Ж-КИ3	09С-Ж-КС3	09С-Ж-ИТ3	09С-Ж-СТ3	09С-Ж-ИС3
09С-Ж-К4	09С-Ж-Т4	09С-Ж-И4	09С-Ж-С4	09С-Ж-КТ4	09С-Ж-КИ4	09С-Ж-КС4	09С-Ж-ИТ4	09С-Ж-СТ4	09С-Ж-ИС4
09С-Ж-К5	09С-Ж-Т5	09С-Ж-И5	09С-Ж-С5	09С-Ж-КТ5	09С-Ж-КИ5	09С-Ж-КС5	09С-Ж-ИТ5	09С-Ж-СТ5	09С-Ж-ИС5
09С-Ж-К6	09С-Ж-Т6	09С-Ж-И6	09С-Ж-С6	09С-Ж-КТ6	09С-Ж-КИ6	09С-Ж-КС6	09С-Ж-ИТ6	09С-Ж-СТ6	09С-Ж-ИС6
Полусапоги, полусапожки женские (09ПС)									
09ПС-Ж-К0	09ПС-Ж-Т0	09ПС-Ж-И0	09ПС-Ж-С0	09ПС-Ж-КТ0	09ПС-Ж-КИ0	09ПС-Ж-КС0	09ПС-Ж-ИТ0	09ПС-Ж-СТ0	09ПС-Ж-ИС0
09ПС-Ж-К1	09ПС-Ж-Т1	09ПС-Ж-И1	09ПС-Ж-С1	09ПС-Ж-КТ1	09ПС-Ж-КИ1	09ПС-Ж-КС1	09ПС-Ж-ИТ1	09ПС-Ж-СТ1	09ПС-Ж-ИС1
09ПС-Ж-К2	09ПС-Ж-Т2	09ПС-Ж-И2	09ПС-Ж-С2	09ПС-Ж-КТ2	09ПС-Ж-КИ2	09ПС-Ж-КС2	09ПС-Ж-ИТ2	09ПС-Ж-СТ2	09ПС-Ж-ИС2
09ПС-Ж-К3	09ПС-Ж-Т3	09ПС-Ж-И3	09ПС-Ж-С3	09ПС-Ж-КТ3	09ПС-Ж-КИ3	09ПС-Ж-КС3	09ПС-Ж-ИТ3	09ПС-Ж-СТ3	09ПС-Ж-ИС3
09ПС-Ж-К4	09ПС-Ж-Т4	09ПС-Ж-И4	09ПС-Ж-С4	09ПС-Ж-КТ4	09ПС-Ж-КИ4	09ПС-Ж-КС4	09ПС-Ж-ИТ4	09ПС-Ж-СТ4	09ПС-Ж-ИС4
09ПС-Ж-К5	09ПС-Ж-Т5	09ПС-Ж-И5	09ПС-Ж-С5	09ПС-Ж-КТ5	09ПС-Ж-КИ5	09ПС-Ж-КС5	09ПС-Ж-ИТ5	09ПС-Ж-СТ5	09ПС-Ж-ИС5
09ПС-Ж-К6	09ПС-Ж-Т6	09ПС-Ж-И6	09ПС-Ж-С6	09ПС-Ж-КТ6	09ПС-Ж-КИ6	09ПС-Ж-КС6	09ПС-Ж-ИТ6	09ПС-Ж-СТ6	09ПС-Ж-ИС6

Полуботинки женские (010ПБ)									
010ПБ-Ж-К0	010ПБ-Ж-Т0	010ПБ-Ж-И0	010ПБ-Ж-С0	010ПБ-Ж-КТ0	010ПБ-Ж-КИ0	010ПБ-Ж-КС0	010ПБ-Ж-ИТ0	010ПБ-Ж-СТ0	010ПБ-Ж-ИС0
010ПБ-Ж-К1	010ПБ-Ж-Т1	010ПБ-Ж-И1	010ПБ-Ж-С1	010ПБ-Ж-КТ1	010ПБ-Ж-КИ1	010ПБ-Ж-КС1	010ПБ-Ж-ИТ1	010ПБ-Ж-СТ1	010ПБ-Ж-ИС1
010ПБ-Ж-К2	010ПБ-Ж-Т2	010ПБ-Ж-И2	010ПБ-Ж-С2	010ПБ-Ж-КТ2	010ПБ-Ж-КИ2	010ПБ-Ж-КС2	010ПБ-Ж-ИТ2	010ПБ-Ж-СТ2	010ПБ-Ж-ИС2
010ПБ-Ж-К3	010ПБ-Ж-Т3	010ПБ-Ж-И3	010ПБ-Ж-С3	010ПБ-Ж-КТ3	010ПБ-Ж-КИ3	010ПБ-Ж-КС3	010ПБ-Ж-ИТ3	010ПБ-Ж-СТ3	010ПБ-Ж-ИС3
010ПБ-Ж-К4	010ПБ-Ж-Т4	010ПБ-Ж-И4	010ПБ-Ж-С4	010ПБ-Ж-КТ4	010ПБ-Ж-КИ4	010ПБ-Ж-КС4	010ПБ-Ж-ИТ4	010ПБ-Ж-СТ4	010ПБ-Ж-ИС4
010ПБ-Ж-К5	010ПБ-Ж-Т5	010ПБ-Ж-И5	010ПБ-Ж-С5	010ПБ-Ж-КТ5	010ПБ-Ж-КИ5	010ПБ-Ж-КС5	010ПБ-Ж-ИТ5	010ПБ-Ж-СТ5	010ПБ-Ж-ИС5
010ПБ-Ж-К6	010ПБ-Ж-Т6	010ПБ-Ж-И6	010ПБ-Ж-С6	010ПБ-Ж-КТ6	010ПБ-Ж-КИ6	010ПБ-Ж-КС6	010ПБ-Ж-ИТ6	010ПБ-Ж-СТ6	010ПБ-Ж-ИС6
Туфли женские (011Т)									
011Т-Ж-К0	011Т-Ж-Т0	011Т-Ж-И0	011Т-Ж-С0	011Т-Ж-КТ0	011Т-Ж-КИ0	011Т-Ж-КС0	011Т-Ж-ИТ0	011Т-Ж-СТ0	011Т-Ж-ИС0
011Т-Ж-К1	011Т-Ж-Т1	011Т-Ж-И1	011Т-Ж-С1	011Т-Ж-КТ1	011Т-Ж-КИ1	011Т-Ж-КС1	011Т-Ж-ИТ1	011Т-Ж-СТ1	011Т-Ж-ИС1
011Т-Ж-К4	011Т-Ж-Т4	011Т-Ж-И4	011Т-Ж-С4	011Т-Ж-КТ4	011Т-Ж-КИ4	011Т-Ж-КС4	011Т-Ж-ИТ4	011Т-Ж-СТ4	011Т-Ж-ИС4
011Т-Ж-К5	011Т-Ж-Т5	011Т-Ж-И5	011Т-Ж-С5	011Т-Ж-КТ5	011Т-Ж-КИ5	011Т-Ж-КС5	011Т-Ж-ИТ5	011Т-Ж-СТ5	011Т-Ж-ИС5
011Т-Ж-К6	011Т-Ж-Т6	011Т-Ж-И6	011Т-Ж-С6	011Т-Ж-КТ6	011Т-Ж-КИ6	011Т-Ж-КС6	011Т-Ж-ИТ6	011Т-Ж-СТ6	011Т-Ж-ИС6
Обувь мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М)/255(40) – 305(47)									
Материал верха									
Кожа (К)	Текстиль (Т)	Искусственная кожа (И)	Синтетическая кожа (С)	Комбинированный верх					
				Кожа + текстиль (КТ)	Кожа + искусственная кожа (КИ)	Кожа + синтетическая кожа (КС)	Искусственная кожа + текстиль (ИТ)	Синтетическая кожа + текстиль (СТ)	Искусственная + синтетическая кожа (ИС)
Ботинки мужские (09Б)									
09Б-М-К0	09Б-М-Т0	09Б-М-И0	09Б-М-С0	09Б-М-КТ0	09Б-М-КИ0	09Б-М-КС0	09Б-М-ИТ0	09Б-М-СТ0	09Б-М-ИС0
09Б-М-К1	09Б-М-Т1	09Б-М-И1	09Б-М-С1	09Б-М-КТ1	09Б-М-КИ1	09Б-М-КС1	09Б-М-ИТ1	09Б-М-СТ1	09Б-М-ИС1
09Б-М-К2	09Б-М-Т2	09Б-М-И2	09Б-М-С2	09Б-М-КТ2	09Б-М-КИ2	09Б-М-КС2	09Б-М-ИТ2	09Б-М-СТ2	09Б-М-ИС2
09Б-М-К3	09Б-М-Т3	09Б-М-И3	09Б-М-С3	09Б-М-КТ3	09Б-М-КИ3	09Б-М-КС3	09Б-М-ИТ3	09Б-М-СТ3	09Б-М-ИС3
09Б-М-К4	09Б-М-Т4	09Б-М-И4	09Б-М-С4	09Б-М-КТ4	09Б-М-КИ4	09Б-М-КС4	09Б-М-ИТ4	09Б-М-СТ4	09Б-М-ИС4
09Б-М-К5	09Б-М-Т5	09Б-М-И5	09Б-М-С5	09Б-М-КТ5	09Б-М-КИ5	09Б-М-КС5	09Б-М-ИТ5	09Б-М-СТ5	09Б-М-ИС5
09Б-М-К6	09Б-М-Т6	09Б-М-И6	09Б-М-С6	09Б-М-КТ6	09Б-М-КИ6	09Б-М-КС6	09Б-М-ИТ6	09Б-М-СТ6	09Б-М-ИС6

Сапоги мужские (09С)									
09С-М-К0	09С-М-Т0	09С-М-И0	09С-М-С0	09С-М-КТ0	09С-М-КИ0	09С-М-КС0	09С-М-ИТ0	09С-М-СТ0	09С-М-ИС0
09С-М-К1	09С-М-Т1	09С-М-И1	09С-М-С1	09С-М-КТ1	09С-М-КИ1	09С-М-КС1	09С-М-ИТ1	09С-М-СТ1	09С-М-ИС1
09С-М-К2	09С-М-Т2	09С-М-И2	09С-М-С2	09С-М-КТ2	09С-М-КИ2	09С-М-КС2	09С-М-ИТ2	09С-М-СТ2	09С-М-ИС2
09С-М-К3	09С-М-Т3	09С-М-И3	09С-М-С3	09С-М-КТ3	09С-М-КИ3	09С-М-КС3	09С-М-ИТ3	09С-М-СТ3	09С-М-ИС3
09С-М-К4	09С-М-Т4	09С-М-И4	09С-М-С4	09С-М-КТ4	09С-М-КИ4	09С-М-КС4	09С-М-ИТ4	09С-М-СТ4	09С-М-ИС4
09С-М-К5	09С-М-Т5	09С-М-И5	09С-М-С5	09С-М-КТ5	09С-М-КИ5	09С-М-КС5	09С-М-ИТ5	09С-М-СТ5	09С-М-ИС5
09С-М-К6	09С-М-Т6	09С-М-И6	09С-М-С6	09С-М-КТ6	09С-М-КИ6	09С-М-КС6	09С-М-ИТ6	09С-М-СТ6	09С-М-ИС6
Полусапоги, полусапожки мужские (09ПС)									
09ПС-М-К0	09ПС-М-Т0	09ПС-М-И0	09ПС-М-С0	09ПС-М-КТ0	09ПС-М-КИ0	09ПС-М-КС0	09ПС-М-ИТ0	09ПС-М-СТ0	09ПС-М-ИС0
09ПС-М-К1	09ПС-М-Т1	09ПС-М-И1	09ПС-М-С1	09ПС-М-КТ1	09ПС-М-КИ1	09ПС-М-КС1	09ПС-М-ИТ1	09ПС-М-СТ1	09ПС-М-ИС1
09ПС-М-К2	09ПС-М-Т2	09ПС-М-И2	09ПС-М-С2	09ПС-М-КТ2	09ПС-М-КИ2	09ПС-М-КС2	09ПС-М-ИТ2	09ПС-М-СТ2	09ПС-М-ИС2
09ПС-М-К3	09ПС-М-Т3	09ПС-М-И3	09ПС-М-С3	09ПС-М-КТ3	09ПС-М-КИ3	09ПС-М-КС3	09ПС-М-ИТ3	09ПС-М-СТ3	09ПС-М-ИС3
09ПС-М-К4	09ПС-М-Т4	09ПС-М-И4	09ПС-М-С4	09ПС-М-КТ4	09ПС-М-КИ4	09ПС-М-КС4	09ПС-М-ИТ4	09ПС-М-СТ4	09ПС-М-ИС4
09ПС-М-К5	09ПС-М-Т5	09ПС-М-И5	09ПС-М-С5	09ПС-М-КТ5	09ПС-М-КИ5	09ПС-М-КС5	09ПС-М-ИТ5	09ПС-М-СТ5	09ПС-М-ИС5
09ПС-М-К6	09ПС-М-Т6	09ПС-М-И6	09ПС-М-С6	09ПС-М-КТ6	09ПС-М-КИ6	09ПС-М-КС6	09ПС-М-ИТ6	09ПС-М-СТ6	09ПС-М-ИС6
Полуботинки мужские (010ПБ)									
010ПБ-М-К0	010ПБ-М-Т0	010ПБ-М-И0	010ПБ-М-С0	010ПБ-М-КТ0	010ПБ-М-КИ0	010ПБ-М-КС0	010ПБ-М-ИТ0	010ПБ-М-СТ0	010ПБ-М-ИС0
010ПБ-М-К1	010ПБ-М-Т1	010ПБ-М-И1	010ПБ-М-С1	010ПБ-М-КТ1	010ПБ-М-КИ1	010ПБ-М-КС1	010ПБ-М-ИТ1	010ПБ-М-СТ1	010ПБ-М-ИС1
010ПБ-М-К2	010ПБ-М-Т2	010ПБ-М-И2	010ПБ-М-С2	010ПБ-М-КТ2	010ПБ-М-КИ2	010ПБ-М-КС2	010ПБ-М-ИТ2	010ПБ-М-СТ2	010ПБ-М-ИС2
010ПБ-М-К3	010ПБ-М-Т3	010ПБ-М-И3	010ПБ-М-С3	010ПБ-М-КТ3	010ПБ-М-КИ3	010ПБ-М-КС3	010ПБ-М-ИТ3	010ПБ-М-СТ3	010ПБ-М-ИС3
010ПБ-М-К4	010ПБ-М-Т4	010ПБ-М-И4	010ПБ-М-С4	010ПБ-М-КТ4	010ПБ-М-КИ4	010ПБ-М-КС4	010ПБ-М-ИТ4	010ПБ-М-СТ4	010ПБ-М-ИС4
010ПБ-М-К5	010ПБ-М-Т5	010ПБ-М-И5	010ПБ-М-С5	010ПБ-М-КТ5	010ПБ-М-КИ5	010ПБ-М-КС5	010ПБ-М-ИТ5	010ПБ-М-СТ5	010ПБ-М-ИС5
010ПБ-М-К6	010ПБ-М-Т6	010ПБ-М-И6	010ПБ-М-С6	010ПБ-М-КТ6	010ПБ-М-КИ6	010ПБ-М-КС6	010ПБ-М-ИТ6	010ПБ-М-СТ6	010ПБ-М-ИС6

Туфли мужские (011Т)									
011Т-М-К0	011Т-М-Т0	011Т-М-И0	011Т-М-С0	011Т-М-КТ0	011Т-М-КИ0	011Т-М-КС0	011Т-М-ИТ0	011Т-М-СТ0	011Т-М-ИС0
011Т-М-К1	011Т-М-Т1	011Т-М-И1	011Т-М-С1	011Т-М-КТ1	011Т-М-КИ1	011Т-М-КС1	011Т-М-ИТ1	011Т-М-СТ1	011Т-М-ИС1
011Т-М-К2	011Т-М-Т2	011Т-М-И2	011Т-М-С2	011Т-М-КТ2	011Т-М-КИ2	011Т-М-КС2	011Т-М-ИТ2	011Т-М-СТ2	011Т-М-ИС2
011Т-М-К3	011Т-М-Т3	011Т-М-И3	011Т-М-С3	011Т-М-КТ3	011Т-М-КИ3	011Т-М-КС3	011Т-М-ИТ3	011Т-М-СТ3	011Т-М-ИС3
011Т-М-К4	011Т-М-Т4	011Т-М-И4	011Т-М-С4	011Т-М-КТ4	011Т-М-КИ4	011Т-М-КС4	011Т-М-ИТ4	011Т-М-СТ4	011Т-М-ИС4
011Т-М-К5	011Т-М-Т5	011Т-М-И5	011Т-М-С5	011Т-М-КТ5	011Т-М-КИ5	011Т-М-КС5	011Т-М-ИТ5	011Т-М-СТ5	011Т-М-ИС5
011Т-М-К6	011Т-М-Т6	011Т-М-И6	011Т-М-С6	011Т-М-КТ6	011Т-М-КИ6	011Т-М-КС6	011Т-М-ИТ6	011Т-М-СТ6	011Т-М-ИС6

Где:

- **вид обуви** - 09Б - ботинки; 09С – сапоги, 09ПС – полусапоги, полусапожки; 010ПБ - полуботинки; 011Т - туфли.
- **половозрастные группы**: МД - малодетская; ДШ - дошкольная; Ш – школьная (для девочек и мальчиков); Пд и Пм – подростковая (девичья и мальчиковая); Ж - женская; М – мужская.
- **материал верха**: - К-кожа; - Т-текстиль; - И-искусственная кожа.
- **материал подкладки**: - 1-кожа; - 2 натуральный мех;- 3-искусственный мех; - 4-текстиль; - 5-байка; - 6-искусственная кожа, - 0- без подкладки

4.4 Габаритные размеры и масса обуви указаны на рисунках 1-6 и таблицах 2-7.

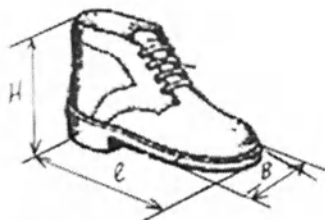


Рисунок 1 Ботинок

Таблица 2

Половозрастная группа применения обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Ботинок (09Б)			
		Размеры, мм			Масса полупары, г не более
		L±1,5	B±0,5	H не менее	
Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД)	125	144	66	67	95
	130	150	67	69	105
	135	157	68	71	115
	145	163	69	74	125
	150	170	71	76	135
	155	177	72	78	145
	165	183	74	80	155
Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ)	170	190	75	82	165
	175	196	77	84	174
	185	203	78	86	183
	190	209	80	88	192
	195	216	81	90	201
Для школьников- девочек и школьников-мальчиков с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш)	205	236	87	106	220
	210	243	88	108	230
	215	249	90	110	240
	225	256	92	112	250
	230	263	93	114	260
	235	269	95	116	270
	240	276	99	118	280
Девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пд)	225	256	93	131	363
	230	263	95	133	378
	235	269	97	135	393
	245	276	99	137	408
	250	283	101	139	423
	255	289	102	141	438
Мальчиковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пм)	245	271	98	118	325
	250	277	100	120	337
	255	284	102	122	349
	265	290	104	124	361
	270	297	106	126	373
	275	303	108	128	385
Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж)	230	263	95	133	378
	235	269	97	135	393
	245	276	99	137	408
	250	283	101	139	423
	255	289	102	141	438
	265	296	104	143	453
	270	302	106	145	468
	275	308	108	147	483

Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М)	255	284	102	122	349
	265	290	104	124	361
	270	297	106	126	373
	275	303	108	128	385
	285	310	110	130	397
	290	317	112	132	409
	295	323	114	134	421
	305	330	116	136	433

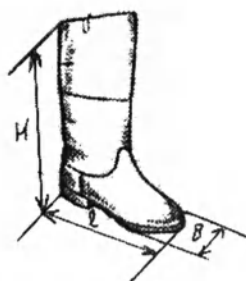


Рисунок 2 Сапог

Таблица 3

Половозраст- ная группа применения обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Сапоги (09С)			Масса полупары, г не более
		Размеры, мм			
		L±1,5	B±0.5	Н не менее	
Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД)	125	152	68	125	206
	130	158	71	129	221
	135	165	72	132	236
	145	171	74	136	251
	150	178	73	140	266
	155	185	75	143	281
	165	191	76	146	296
Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ)	170	199	78	140	311
	175	204	79	144	326
	185	211	81	148	341
	190	218	83	152	356
	195	224	84	156	371
Для школьников- девочек и школьников-мальчиков с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш)	205	236	87	106	220
	210	243	88	108	230
	215	249	90	110	240
	225	256	92	112	250
	230	263	93	114	260
	235	269	95	116	270
	240	276	99	118	280
Девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пд)	225	256	93	182	465
	230	263	95	186	480
	235	269	97	190	495
	245	276	99	194	510
	250	283	101	198	525
	255	289	102	202	540
Мальчиковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пм)	245	274	99	198	570
	250	280	101	202	590
	255	287	103	206	610
	265	293	105	210	630
	270	300	107	214	650
	275	307	109	218	670

Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж)	230	263	95	236	480
	235	269	97	240	495
	245	276	99	244	510
	250	283	101	248	525
	255	289	102	252	540
	265	296	104	256	555
	270	302	106	260	570
Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М)	275	308	108	264	585
	255	296	106	207	590
	265	304	108	211	610
	270	310	110	215	630
	275	317	112	219	650
	285	324	114	223	670
	290	332	116	227	690
	295	340	118	231	710
	305	347	120	235	730

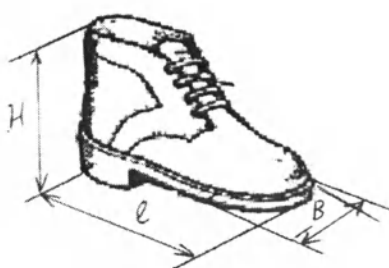


Рисунок.3 Полусапог (полусапожок)

Таблица 4

Половозрастная группа применения обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Полусапог (полусапожок) (09ПС)			
		Размеры, мм			Масса полупары, г не более
		L±1,5	B±0,5	H не менее	
Для школьников- девочек и школьников-мальчиков с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш)	205	236	87	106	220
	210	243	88	108	230
	215	249	90	110	240
	225	256	92	112	250
	230	263	93	114	260
	235	269	95	116	270
	240	276	99	118	280
Девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пд)	225	256	93	154	428
	230	263	95	157	443
	235	269	97	160	458
	245	276	99	163	473
	250	283	101	166	488
	255	289	102	169	503
Мальчиковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пм)	245	274	99	142	530
	250	280	101	145	545
	255	287	103	148	560
	265	293	105	151	575
	270	300	107	154	590
	275	307	109	157	605
Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж)	230	263	95	157	443
	235	269	97	160	458
	245	276	99	163	473
	250	283	101	166	488
	255	289	102	169	503
	265	296	104	172	518
	270	302	106	175	533
	275	308	108	178	548

Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М)	255	296	106	148	560
	265	304	108	151	575
	270	310	110	154	590
	275	317	112	157	605
	285	324	114	160	620
	290	332	116	163	635
	295	340	118	166	650
	305	347	120	169	665

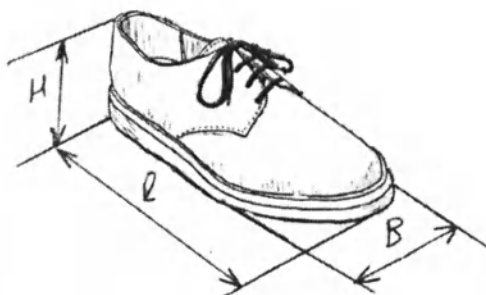


Рисунок 4 Полуботинок

Таблица 5

Половозрастная группа применения обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Полуботинок (010ПБ)			
		Размеры, мм			Масса полупары, г не более
		L±1,5	B±0.5	H не менее	
Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД)	125	144	66	59	109
	130	150	67	60	115
	135	157	68	61	121
	145	163	69	62	127
	150	170	71	63	133
	155	177	72	64	139
	165	183	74	65	145
Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ)	170	190	75	60	151
	175	196	77	61	157
	185	203	78	62	163
	190	209	80	63	169
	195	216	81	64	175
Для школьников- девочек и школьников-мальчиков с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш)	205	236	87	106	220
	210	243	88	108	230
	215	249	90	110	240
	225	256	92	112	250
	230	263	93	114	260
	235	269	95	116	270
	240	276	99	118	280
Девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пд)	225	256	93	96	282
	230	263	95	97	293
	235	269	97	98	304
	245	276	99	99	315
	255	283	101	100	326
	260	289	102	101	337
Мальчиковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пм)	245	271	98	87	325
	250	277	100	88	337
	255	284	102	89	349
	265	290	104	90	361
	270	297	106	91	373
	275	303	108	92	385

Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж)	230	263	95	97	293
	235	269	97	98	304
	245	276	99	99	315
	250	283	101	100	326
	255	289	102	101	337
	265	296	104	102	348
	270	302	106	103	359
	275	308	108	104	370
Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М)	255	284	102	89	349
	265	290	104	90	361
	270	297	106	91	373
	275	303	108	92	385
	285	310	110	93	397
	290	317	112	94	409
	295	323	114	95	421
	305	330	116	96	433

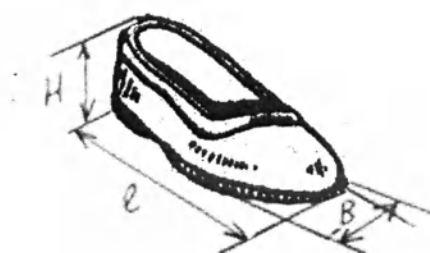


Рисунок 5 Туфель

Таблица 6

Половозраст-ная группа применения обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви - Туфель (011Т)			
		Размеры, мм			Масса полупары, г не более
		L±1,5	B±0.5	H не менее	
Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД)	125	144	66	59	109
	130	150	67	60	115
	135	157	68	61	121
	145	163	69	62	127
	150	170	71	63	133
	155	177	72	64	139
	165	183	74	65	145
Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ)	170	190	75	60	151
	175	196	77	61	157
	185	203	78	62	163
	190	209	80	63	169
	195	216	81	64	175
Для школьников- девочек и школьников-мальчиков с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш)	205	236	87	106	220
	210	243	88	108	230
	215	249	90	110	240
	225	256	92	112	250
	230	263	93	114	260
	235	269	95	116	270
	240	276	99	118	280
Девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пд)	225	256	93	96	282
	230	263	95	97	293
	235	269	97	98	304
	245	276	99	99	315
	255	283	101	100	326
	260	289	102	101	337

Мальчиковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пм)	245	271	98	87	325
	250	277	100	88	337
	255	284	102	89	349
	265	290	104	90	361
	270	297	106	91	373
	275	303	108	92	385
Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж)	230	252	94	97	238
	235	259	96	98	248
	245	266	98	99	258
	250	273	99	100	268
	255	280	101	101	278
	265	287	103	102	288
	270	294	105	103	298
	275	301	107	104	308
Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М)	255	284	102	89	349
	265	290	104	90	361
	270	297	106	91	373
	275	303	108	92	385
	285	310	110	93	397
	290	317	112	94	409
	295	323	114	95	421
	305	330	116	96	433

4.5 Перечень деталей, из которых состоит каждый вид обуви, должен соответствовать таблице 7:

Таблица 7

Вид обуви	Перечень деталей, из которых состоит обувь
Ботинок (09Б)	Ботинок в соответствии с функциональным назначением, может включать специальные детали: - специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий; - специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка; - межстелечные слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, пронатор. - специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная), каблук. Конструкция ботинка включает в себя: детали верха заготовки, детали подкладки заготовки, детали низа обуви и промежуточные детали. Детали верха: союзка, обсоюзка, отрезной носок, берец наружный, берец внутренний, отрезная задинка, надблочник, задний наружный ремень, мягкий кант, надблочник, ремень. Детали подкладки: берец внутренний, берец наружный, союзка, задний внутренний ремень, штаферка, подблочник, клапан под молнию. Детали низа: основная стелька, вкладная стелька, подошва. Промежуточные детали: задник, подносок, простилка м/подкладка деталей верха.
Сапог (09С)	Сапог в соответствии с функциональным назначением, может включать специальные детали: - специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий; - специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка; - межстелечные слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, пронатор. - специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная). Конструкция сапога включает в себя: детали верха заготовки, детали подкладки заготовки, детали низа обуви и промежуточные детали обуви. Детали верха: союзка, обсоюзка, отрезной носок, голенище наружное, голенище

	внутреннее, отрезная задинка, задний наружный ремень. Детали подкладки: голенище внутреннее, голенище наружное задний внутренний ремень, штаферка, клапан под молнию. Детали низа: основная стелька, вкладная стелька, подошва. Промежуточные детали: задник, подносок, простилка м/подкладка деталей верха.
Полусапог, полусапожок (09ПС)	Полусапог, полусапожок в соответствии с функциональным назначением, может включать специальные детали: - специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий; - специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка; - межстелечные слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, пронатор. - специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная). Конструкция полусапога, полусапожка включает в себя: детали верха заготовки, детали подкладки заготовки, детали низа обуви и промежуточные детали обуви. Детали верха: союзка, обсоюзка, отрезной носок, голенище наружное, голенище внутреннее, отрезная задинка, задний наружный ремень. Детали подкладки: голенище внутреннее, голенище наружное задний внутренний ремень, штаферка, клапан под молнию. Детали низа: основная стелька, вкладная стелька, подошва. Промежуточные детали: задник, подносок, простилка м/подкладка деталей верха.
Полуботинок (010ПБ)	Полуботинок в соответствии с функциональным назначением, может включать специальные детали: - специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий; - специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка; - межстелечные слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, пронатор. - специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная) Конструкция полуботинка включает в себя: детали верха заготовки, детали подкладки заготовки, детали низа обуви и промежуточные детали обуви. Детали верха: союзка, отрезной носок, обсоюзка, берец наружный, берец внутренний, отрезная задинка, надблочник, задний наружный ремень, мягкий кант, ремень. Детали подкладки: союзка, берец внутренний, берец наружный, подблочник, задний внутренний ремень, Детали низа: основная стелька, вкладная стелька, подошва. Промежуточные детали: задник, подносок, простилка м/подкладка деталей верха.
Туфель (011Т)	Обувь в соответствии с ее функциональным назначением, может включать специальные детали: - специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий; - специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка; - межстелечные слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, пронатор. - специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная), каблук. Конструкция туфли включает в себя: детали верха заготовки, детали подкладки заготовки, детали низа обуви и промежуточные детали. Детали верха: союзка, отрезной носок, берец наружный, берец внутренний, отрезная задинка, задний наружный ремень, мягкий кант, обсоюзка, ремень. Детали подкладки: союзка, берец внутренний, берец наружный, задний внутренний ремень. Детали низа: основная стелька, вкладная стелька, подошва, каблук. Промежуточные детали: задник, подносок, простилка м/подкладка деталей верха.

5 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Обувь должна свободно надеваться и быть плотно закреплена на ноге при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или застежки «контакт».

5.2 В первый день после получения обуви необходимо надеть её и походить в течении 15-20 минут, во второй и третий день рекомендуется надеть обувь и в течении одного часа (можно с перерывами) походить в ней.

5.3 При эксплуатации обуви необходимо учитывать сезонность (летняя, зимняя, весенне-осенняя, круглосезонная). Кожаная обувь не предназначена для носки в сырую, дождливую погоду т.к. она не является непромокаемой (как, например, резиновая).

5.4 При носке обуви:

- обувь не должна препятствовать нормальному функционированию стопы, вызывать болезненных ощущений и неудобств при пользовании;
- обувь должна быть плотно закреплена на ноге при помощи шнурков, пряжек, текстильных застежек «контакт»;
- при носке обуви в течение дня следует изменять объем обуви и плотность ее прилегания к ноге при помощи застежек;
- не должно быть избыточного давления верха обуви и со стороны межстелечного слоя или стелек на мягкие ткани стопы;
- должен быть обеспечен незатрудненный пережат при ходьбе, а также надежная фиксация стопы в обуви в заданном положении;
- подошва обуви должна иметь хорошее сцепление с опорной поверхностью.

5.5 Ежедневно на ночь необходимо обмывать ноги теплой водой и насухо вытирать их полотенцем.

6 УХОД ЗА ОБУВЬЮ

6.1 Не оставляйте на хранение обувь в грязном состоянии, т.к. это может стать причиной изменения цвета, а также привести к деформации обуви.

6.2 Обувь необходимо ежедневно очищать от грязи и пыли мягкой влажной тряпкой или щеткой. Запрещается мыть обувь в воде.

6.3 Никогда не сушите мокрую обувь на нагретых поверхностях, или вблизи открытого огня. Сушите обувь при комнатной температуре, используя специальные распорки, или предварительно плотно набив её бумагой.

6.4 Ежедневно вечером следует вынимать стельки, протирать и оставлять их на ночь на открытом воздухе для просушки. Сушить стельки следует вдали от солнечных лучей и отопительных приборов.

6.5 Межстелечный слой обуви следует подвергать ежедневной гигиенической обработке раствором детского мыла или растворами нейтральных моющих средств в теплой воде при температуре не превышающей 40 градусов С.

6.6 Для освежения цвета, придания блеска и защиты от вредного воздействия окружающей среды, после чистки на кожу обуви следует

нанести тонкий слой цветного или бесцветного крема и располировать его волосяной щеткой или шерстяной тряпкой. В случае, если лицевой слой кожи механически поврежден, на это место наносится тонкий слой краски соответствующего цвета.

7 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ОБУВИ

7.1 МАРКИРОВКА

7.1.1 Каждая полупара обуви должна быть замаркирована в соответствии с требованиями таблицы 8.

Допускается товарный знак или наименование предприятия изготовителя изображать на отдельной ленте с клеевой основой методом шелкографии.

Таблица 8

Содержание маркировки	Место нанесения маркировки	Способ нанесения маркировки
Товарный знак или наименование предприятия изготовителя	В геленочной части вкладки стельки (полустельки), или на подпяточнике, или на кожаной подкладке верхней части берца, или на клапане под креплением (застежка «контакт» или «молния»).	Несмываемой краской или горячим тиснением, в том числе через фольгу
Номер контролера, ОТК (Клеймо ОТК)	На штафёрке, или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под креплением (застежка «контакт» или «молния»).	Штемпелевание
Модель, (таблица 1); полнота; дата выпуска (месяц, год).	На ярлык, прикрепляемый к подкладке каждой полупары обуви или другим деталям -	Несмываемой краской или горячим тиснением, в том числе через фольгу
Размер штихмассовый	На ходовой поверхности подошвы в геленочной части каждой полу	Формуются в процессе литья в пресс-форме

7.1.2 Маркировка потребительской упаковки.

На торцевой поверхности каждой коробки прикреплена этикетка или нанесен штамп с четким маркированием следующих обозначений:

- вида обуви и половозрастной группы;
- товарного знака предприятия-изготовителя;
- наименования предприятия-изготовителя и его юридический и почтовый адрес;
- страны-изготовителя;
- модели и (или) артикула;
- размера;
- полноты;

- цвета;
- материалов верха и подкладки;
- обозначения технических условий;
- даты изготовления (месяц, год):
- штрихового (идентификационного) кода продукции.

7.1.3 Маркировка транспортной тары содержит:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя - его юридический и почтовый адрес;
- обозначение настоящих технических условий;
- модель и (или) артикул;
- вид обуви;
- половозрастную группу (при необходимости);
- цвет;
- количества пар обуви в ящике;
- манипуляционный знак «Беречь от влаги» — по ГОСТ 14192;
- дату упаковки;
- номера упаковщика;
- штрихового (идентификационного) кода продукции.

7.2 УПАКОВКА

7.2.1 Каждая пара обуви должна быть упакована в коробку из картона для обуви (потребительская упаковка).

7.2.1 В каждую потребительскую упаковку должна быть вложена памятка по пользованию.

Картонные коробки с обувью должны быть плотно уложены в транспортную тару - ящики деревянные или ящики из гофрированного картона.

Количество потребительских упаковок в транспортной таре и схему укладки определяет изготовитель обуви в зависимости от количества пар (полупар) обуви в одной поставке.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование обуви должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от минус 50 °С до 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

8.2 При транспортировании в условиях отрицательных температур требуется выдержка обуви в транспортной таре в течение 12 часов при комнатной температуре.

8.3 Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже плюс 14 и не выше плюс 25 градусов С и относительной влажности воздуха 50 - 80 %.

8.4 Хранение обуви в потребительской упаковке или транспортной таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м.

8.5 Расстояние от хранящейся обуви до наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м.

8.6 Обувь при хранении должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.

9 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 Обувь показана для применения детям, подросткам и взрослым пациентам с умеренно выраженными деформациями нижних конечностей: плоскостопие, пяточные «шпоры», а также больным с начальной стадией сахарного диабета для:

- обеспечения рационального распределения давления по подошвенной поверхности стопы с учётом её индивидуальных анатомо-функциональных особенностей;

- восстановления или компенсации функции стояния и ходьбы;

- предотвращения травматизации мягких тканей стопы с целью профилактики гнойно-некротических осложнений и ранней ампутации стопы;

- профилактики или компенсации деформации костно-суставного аппарата стопы:

- при продольном плоскостопии;

- при комбинированном плоскостопии;

- при полой стопе;

- при распластанности переднего отдела стопы;

- при вальгусной, плоско-вальгусной стопе;

- при варусной, половарусной стопе;

- при эквинусной стопе;

- при отвисающей стопе;

- при паралитической стопе.

10 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

10.1 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Применение обуви не по медицинскому назначению.

10.2 ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Не выявлены.

11 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ СОВМЕЩНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБУВИ

11.1 Ограничений по совместному применению обуви с другими медицинскими изделиями разрешенными к применению в установленном порядке на территории РФ не выявлено.

12 РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБУВИ. МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

12.1 Риск возникновения аллергической реакции на материалы изготовления обуви. При возникновении аллергической реакции следует обратиться к врачу.

12.2 Риск дискомфорта, боли, раздражения, травмы пользователя при неправильной эксплуатации обуви. Во избежание риска дискомфорта, боли, раздражения, травмы следует соблюдать правила эксплуатации обуви изложенные в настоящем руководстве. Следует прекратить эксплуатацию обуви при возникновении дискомфорта, боли или раздражения.

12.3 Риск неправильного подбора по виду, назначению, размеру и полноте. Во избежание риска неправильного подбора обуви рекомендовано подбирать обувь врачом-ортопедом.

13 КОМПЛЕКТНОСТЬ

13.1 Комплект поставки должен соответствовать данным, приведенным в таблице 9.

Таблица 9

Наименование	Количество, шт/экз.	Примечание
- Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-33010841-2019	1	одна пара / полупара
- руководство по эксплуатации;	1	
- памятка по пользованию;	1	
- упаковка.	1	
Поставка по половозрастным группам:		
1. Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД) - (ботинки (09Б), сапоги (09С), полуботинки (010ПБ), туфли (011Т), размеры 125-130-135-145-150-155-165;		
2. Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ) (ботинки (09Б), сапоги (09С), полуботинки (010ПБ), туфли (011Т), размеры 170-175-185-190-195;		
3. Для школьников- девочек и школьников-мальчиков с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ботинки (09Б), сапоги (09С), полусапоги, полу-сапожки (09ПС), полуботинки (010ПБ), туфли (011Т), размеры 205-210-215-225-230-235-240;		
4. Подростковая девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пд) - (ботинки (09Б), сапоги (09С), полусапоги, полу-сапожки (09ПС), полуботинки (010ПБ), туфли (011Т), размеры 225-230-235-245-255;		
5. Подростковая мальчиковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Пм) - (ботинки (09Б), сапоги (09С), полусапоги, полу-сапожки (09ПС), полуботинки (010ПБ), туфли (011Т), размеры 245-250-255-265-270-275;		
6. Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж) - (ботинки (09Б), сапоги (09С), полусапоги, полусапожки (09ПС), полуботинки (010ПБ), туфли (011Т), размеры 230-235-245-250-255-265-270-275;		
7. Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М) - (ботинки (09Б), сапоги (09С), полусапоги, полусапожки (09ПС), полуботинки (010ПБ), туфли (011Т), размеры 255-265-270-275-285-290-295-305.		

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям технических условий при условии соблюдения пользователем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

14.2 Гарантийный срок носки обуви со дня выдачи пользователю 45 дней со дня приобретения. Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

14.3 Гарантийными случаями являются:

- разрушение шва крепления деталей верха обуви.
- выпадение кнопок, застежек, блочек и др. фурнитуры.
- разрыв кожи верха заготовки по строчке.
- деформация жестких деталей верха обуви.
- отрыв и отставание подошвы.
- износ подошвы.
- разрыв кожи верха по грани следа.

14.4 В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине пользователя.

15 УТИЛИЗАЦИЯ

15.1 Обувь, которая утратила свои эксплуатационные качества после окончания срока службы, подлежит утилизации как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Допускается утилизация обуви в качестве бытовых отходов.

16 РЕКЛАМАЦИИ

Если имеются дефекты или недостатки, немедленно сообщите об этом организации, где вы приобрели обувь, чтобы вам её поменяли. Присылайте свои претензии по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., Пушкино г., Московский пр-кт, дом № 55, корпус главный цех, комната 17 или по электронной почте e-mail: almida@midisa.ru

17 Перечень национальных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие (обувь ортопедическая).

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 15.309-98	Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 161-86	Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Определение сортности
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 288-72	Войлок технический тонкошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 939-88	Кожа для верха обуви. Технические условия
ГОСТ 940-81	Кожа для подкладки обуви. Технические условия
ГОСТ 1562-69	Сыромять. Технические условия
ГОСТ 1838-91	Кожа из спилка. Общие технические условия

ГОСТ 1903-78	Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия
ГОСТ 1904-81	Кожа шорно-седельная. Технические условия
ГОСТ 3717-84	Замша. Технические условия
ГОСТ 3927-88	Колодки обувные. Общие технические условия
ГОСТ 4661-76	Овчина меховая выделанная. Технические условия
ГОСТ 6309-93	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
ГОСТ 7296-81	Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 9182-75	Кожа для рантов Технические условия
ГОСТ 9542-89	Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия
ГОСТ 10350-81	Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия
Серия стандартов ГОСТ ISO 10993	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.
ГОСТ 11358-89	Толщиномеры и стенкоммеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
ГОСТ 11373-88	Обувь. Размеры
ГОСТ 12632-79	Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия
ГОСТ 13514-93	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 14226-80	Обувь. Нормы гибкости
ГОСТ 14961-91	Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия
ГОСТ ISO 14971-2011	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16534-89	Коробки из картона для обуви. Технические условия
ГОСТ 19196-93	Ткани обувные. Общие технические условия
ГОСТ 21463-87	Обувь. Нормы прочности
ГОСТ 23251-83	Обувь. Термины и определения
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 26167-2005	Обувь повседневная. Общие технические условия
ГОСТ 28367-94	Овчина меховая выделанная Технические условия
ГОСТ 28546-2002	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия
ГОСТ 29298-2005	Ткани обувные хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 29277-92	Кожа для низа обуви. Технические условия
ГОСТ 30019.1-93	Застежка текстильная. Общие технические условия
ГОСТ 30226-93	Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 51632-2014	Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. часть 1. Метрологические и технические требования.

ГОСТ Р 53800-2010	Колодки обувные ортопедические. Общие технические условия
ГОСТ 54407-2011	Обувь ортопедическая. Общие технические условия
ТУ 17-15-22-91	Блочки, крючки, заклепки для изделий легкой промышленности
ОСТ 17-891-86	Застежки-молнии пластмассовые. Общие технические условия
ТУ 6-00-6917903-14	Краска штемпельная
ТУ 20.59.59-063-10861980-2018	Системы трёхкомпонентные полиуретановые на основе сложных полиэфиров серии «NORMA»
ТУ 20.59.59-064-10861980-2018	Системы трёхкомпонентные полиуретановые на основе сложных полиэфиров серии «EXTRA»
ТУ 8729-031-00300297-2007	Материалы жесткие прокладочные
ТУ 29-02-596-76	Фольга для маркировки
ТУ 5459-001-99727629-2016	Материалы термоклеевые и самоклеющиеся на бумажной основе
СанПиН 2.1.7.2790-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
МУ 25.1-001-86	Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей

Прошито и пронумеровано

и скреплено печатью 30 листа(ов).

Должность **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

ФИО **ООО «Альмида»**

Подпись **ДУБРОВИН Д.А.**

"17" ноября 2020 г.

МП

