

Внешний вид

медицинского изделия для диагностики in vitro

ОСНОВА АГАРА БАЙРД-ПАРКЕРА СУХАЯ




вид спереди

Внешний вид

медицинского изделия для диагностики in vitro

ОСНОВА АГАРА БАЙРД-ПАРКЕРА СУХАЯ

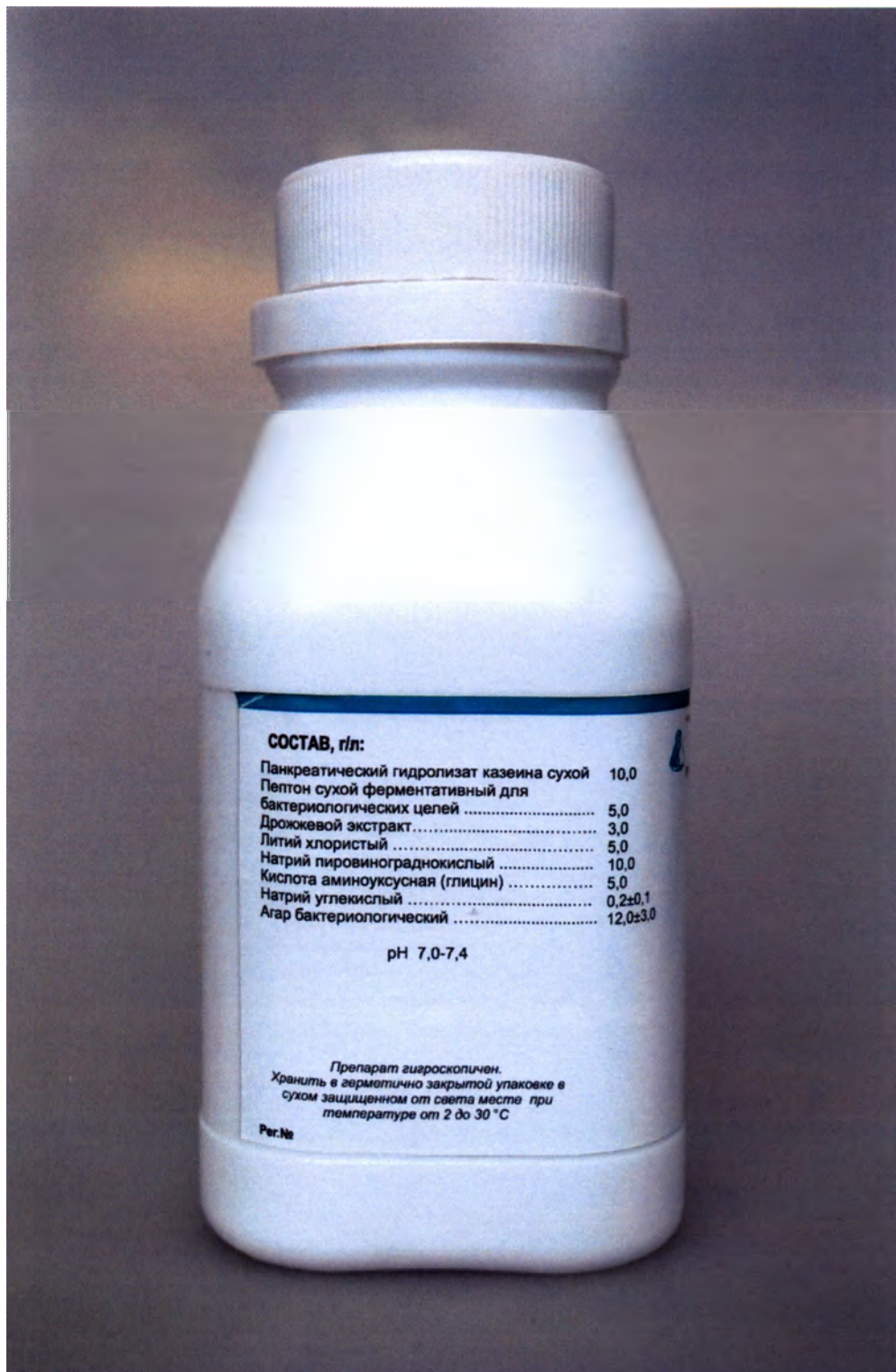


вид слева

Внешний вид

медицинского изделия для диагностики in vitro

ОСНОВА АГАРА БАЙРД-ПАРКЕРА СУХАЯ

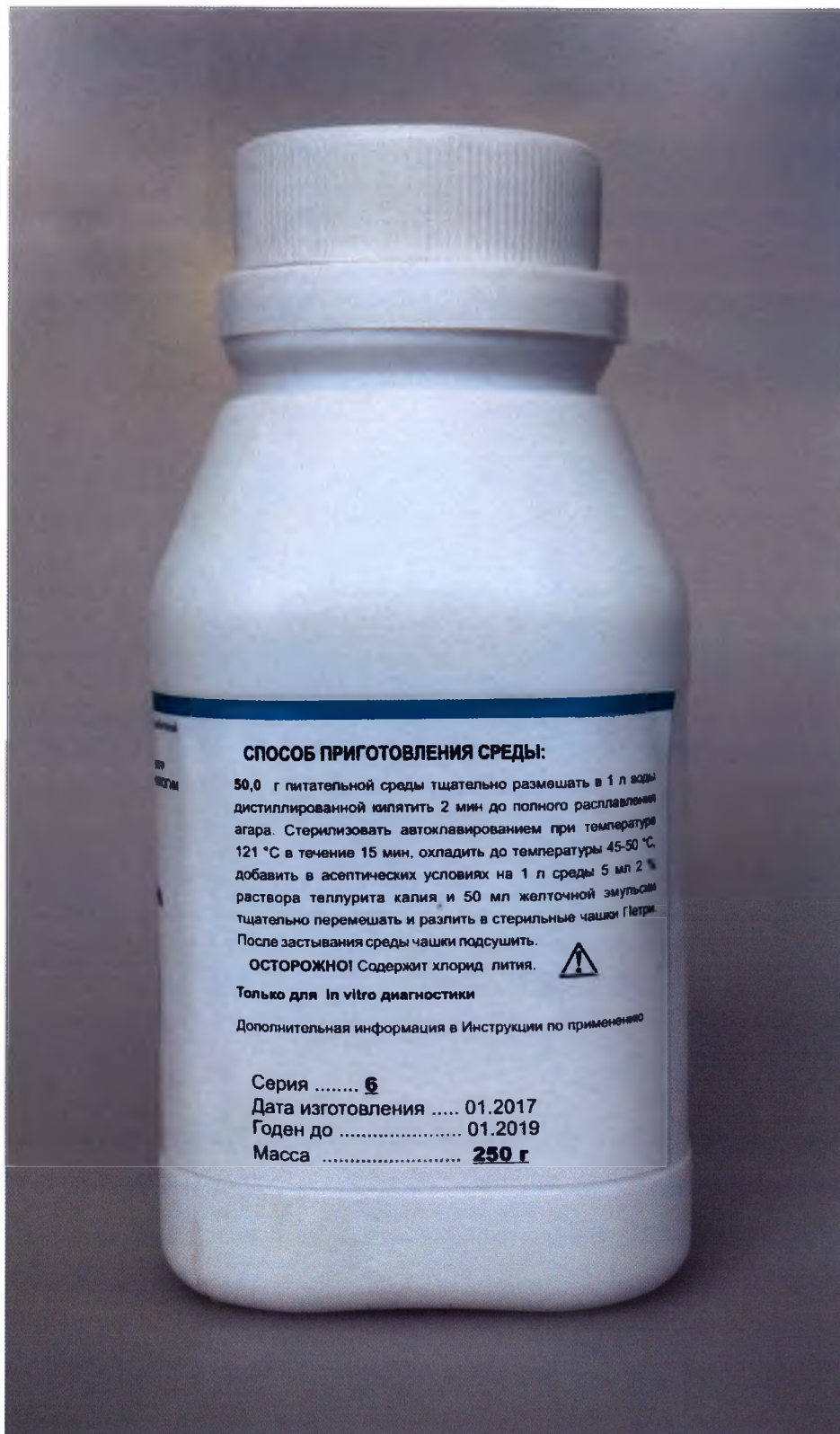

вид справа

Пронумеровано, прошнуровано.
скреплено подписью и печатью

3 (три)

листов. Подпись

С. Сергеев

" 25 " 09

2017



Образец маркировки потребительской тары (банки) медицинского изделия
ОСНОВА АГАРА БАЙРД-ПАРКЕРА СУХАЯ

СОСТАВ, г/л:

Панкреатический гидролизат казеина сухой	10,0
Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей	5,0
Дрожжевой экстракт	3,0
Литий хлористый	5,0
Натрий пировинограднокислый	10,0
Кислота аминокусная (глицин)	5,0
Натрий углекислый	0,2±0,1
Агар бактериологический	12,0±3,0

pH 7,0-7,4

Препарат гигроскопичен.
Хранить в герметично закрытой упаковке в
сухом защищенном от света месте при
температуре от 2 до 30 °С

Рег. №



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

**ОСНОВА
АГАРА БАЙРД-ПАРКЕРА
СУХАЯ**

ТУ 20.59.52-263-78095326-2017

142279 Оболенск, Московская обл.,
Серпуховский р-н, ФБУН ГНЦ ПМБ
(4967) тел.36-00-20, факс 36-01-16
E.mail:info@obolensk.org

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СРЕДЫ:

50,0 г питательной среды тщательно размешать в 1 л воды
дистиллированной кипятить 2 мин до полного расплавления
агара. Стерилизовать автоклавированием при температуре
121 °С в течение 15 мин, охладить до температуры 45-50 °С,
добавить в асептических условиях на 1 л среды 5 мл 2 %
раствора теллурита калия и 50 мл желточной эмульсии
тщательно перемешать и разлить в стерильные чашки Петри.

После застывания среды чашки подсушить

ОСТОРОЖНО! Содержит хлорид лития.



Только для in vitro диагностики

Дополнительная информация в Инструкции по применению

Серия _

Дата изготовления

Годе н до

Масса **250 г**

Директор ФБУН ГНЦ ПМБ



Дятлов И.А.