

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия
Маркировка упаковки - пакет

Подготовка к работе, порядок работы

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие не подлежит использованию.
2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.

Маска позволяет защитить функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.

После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маска медицинская стерильная одноразового использования

ИЗДЕЛИЕ СТИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,

НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения – использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
 - 1-й слой (клицу, неокрашенный) – спанбонд;
 - 2-й слой – фильтрующий (СМС, меллотлауэн) – антибактериальный фильтр;
 - 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд.

Правила хранения и транспортирования
 Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
 Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150.
 Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия
 А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,0 см x 15,0 см, с логотипом или без логотипа.
 Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см, с логотипом или без логотипа.
 *вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

1 маска

Промоактивитель, адреса промодатта

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, поросское поселение Рамаскского, территория Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новокосовская, д. 25

Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10

http://www.endoform.ru

Маска медицинская стерильная одноразового использования, тип I по ГОСТ Р 58396-2019

Дата изготовления:
№ партии:

Дата изготовления:
№ партии:

Срок годности 3 года с даты изготовления.

Штрих-код

Дата изготовления:
№ партии:

Области нанесения даты изготовления и номера партии являются альтернативными

Дополнительно допускается нанесение знаков добровольной международной сертификации



Е.А. Ежова

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП "Московский эндокринный завод"

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020

ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия

Маркировка упаковки - пакет

Производитель, адрес производства Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рынское, территория Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б Организация для принятия претензий от потребителей Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10 http://www.endorplant.ru Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020 Тип II по ГОСТ Р 58396-2019 РЭ №	ФГУП «Московский эндокринный завод» Маска медицинская стерильная одноразового использования ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО НЕТОКСИЧНО ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Область применения – использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями. Состав Маска медицинская состоит из 3 слоев: - 1-й слой (к лицу, неокрашенный) – спанбонд; - 2-й слой – фильтрующий (СМС, мелилблэун) – антибактериальный фильтр; - 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд. Правила хранения и транспортирования Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей. Условия хранения – 1 (I) по ГОСТ 15150. Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150. Варианты исполнения изделия А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,0 см х 15,0 см, с логотипом или без логотипа. Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,5 см х 17,5 см, с логотипом или без логотипа *вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии. 1 маска	Подготовка к работе, порядок работы 1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истечения срока годности, изделие непригодно. 2. Открыть упаковку, вынуть изделие из упаковки. 3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице. 4. Закрепить ушные петли за уши. 5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок. 6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице. Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменять маску по истечении указанного времени. После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям. Рекомендуемые показатели к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения. Использование: Использование по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.790-10 утилизировать в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов. Использовать маску отбрасывая к медицинским отходам класса «Б» и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Исправление: Исправление: исправляющая непригодность материалов маски (наличие predisposedness к аллергии); - Истекший срок годности; - Механические повреждения изделия в составе комплекта. Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски. Условия утилизации Не использование по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.790-10 утилизировать в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Дата изготовления: № партии:	или	или
Срок годности 3 года с даты изготовления. Дата изготовления: № партии:	или	или
Штрих-код	или	или
Дата изготовления № партии:	или	или

Области нанесения даты изготовления и номера партии являются альтернативными

Дополнительно допускается нанесение знаков
добровольной и/или международной сертификации



Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»

Е.А. Ежова

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020

ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия

Маркировка первичной упаковки - печать на пакет, этикетка для пакета

ФГУП «Московский эндокринный завод»

**Маска медицинская стерильная
одноразового использования**

20 пакетов по 1 маске

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения: использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных, лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
- 1-й слой (внутренний, неокрашенный) – спанбонд;
- 2-й слой – фильтрующий (СМС, мелтблаун) – антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд.

Правила хранения и транспортирования:
Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
Условия хранения – 1 (I) по ГОСТ 15150
Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия
А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,0 см х 13,0 см, с логотипом или без логотипа.
Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,5 см х 17,5 см, с логотипом или без логотипа.
*вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы
1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.
2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Покрыть носовой зажим (фиксатор) к переносице.
Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.
После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.
Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания
- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделий в составе комплекта.
Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Утилизация
Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адреса производства
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамазукское, территория Северная промзона, строение 1/2А, строение 2/2Б
Организация для принятия претензий от потребителей
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
Исх. № А/мз.эл.пр.мз.м/м
Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип I по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

Срок годности 3 года с даты изготовления.

Штрих-код

Дата изготовления
№ партии:

Дополнительно допускается нанесение знаков
добровольной и международной сертификации



Е.А. Ежова

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»

**Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия**

Маркировка первичной упаковки - печать на пакет, этикетка для пакета

ФГУП «Московский эндокринный завод»

**Маска медицинская стерильная
одноразового использования**

50 пакетов по 1 маске

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операции или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекции, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения: — использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
-1-й слой (с лицевой неокрашенной) — спанбонд;
-2-й слой — фильтрующий (СМС, мелтблэун) — антибактериальный фильтр;
-3-й слой (внешний, окрашенный) — спанбонд.

Правила хранения и транспортирования
Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
Условия хранения — 1 (I) по ГОСТ 15150.
Условия транспортирования — 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия
А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,0 см х 15,0 см, с логотипом или без логотипа.
Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,5 см х 17,5 см, с логотипом или без логотипа.
Вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы
1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.
2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.
Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.
После применения маску утилизируют согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания:
-Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
-Истекший срок годности;
-Механические повреждения изделий в составе комплекта.

Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации
Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адреса производства
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасуновское, территория Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endopharm.ru>
Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип I по ГОСТ Р 58396-2019
РЧ №

Срок годности 3 года с даты изготовления.

Штрих-код

Дата изготовления
№ партии:

Дополнительно допускается нанесение знаков
добровольного международного сертификации



Е.А. Ежова

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020

С. 5

ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия

Маркировка первичной упаковки - печать на пакет, этикетка для пакета

ФГУП «Московский эндокринный завод»

**Маска медицинская стерильная
одноразового использования**

100 пакетов по 1 маске

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения: использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав:
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
- 1-й слой (внутренний, окрашенный) – спанбонд;
- 2-й слой – фильтрующий (СМС, мелиблэум) – антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд.

Правила хранения и транспортирования:
Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150.
Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия:
А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,0 см x 15,0 см, с логотипом или без логотипа.
Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см, с логотипом или без логотипа.
*вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы:
1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.
2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.
Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.
После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.
Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания:
- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделий в составе комплекта.

Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации:
Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «б» и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адреса производства:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почечский муниципальный район, городское поселение Рамасусское, территория Северная прозона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endofarm.ru>
Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип I по ГОСТ Р 58396-2019
ФГУП

Срок годности 3 года с даты изготовления.

Штрих-код

Дата изготовления
№ партии:

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

STERILIZE
STERILE EO

ФГУП «Московский эндокринный завод»

Дополнительно допускается нанесение знаков
добровольной или международной сертификации



Е.А. Ежова

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия

Маркировка первичной упаковки - печать на пакет. этикетка для пакета

ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маска медицинская стерильная одноразового использования

50 пакетов по 1 маске

**ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО**

**ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения – использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных, лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав

Маска медицинская состоит из 3 слоев:

-1-й слой (внутренний, неокрашенный) – спанбонд;

-2-й слой – фильтрующий (СМС, меллотелу) – антибактериальный фильтр;

-3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд.

Правила хранения и транспортирования

Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохраняя от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Условия хранения – 1 (I) по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия

А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,0 см х 15,0 см, с логотипом или без логотипа.

Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,5 см х 17,5 см, с логотипом или без логотипа.

*вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.

2. Открыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.

3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.

4. Закрепить ушные петли за уши.

5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.

6. Принять носовую завязь (фиксатор) к переносице.

Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.

После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые показания к применению: Применять с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания:

-Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);

-Истекший срок годности;

-Механические повреждения изделий в составе комплекта.

Побочные эффекты: Возмозно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации

Не использовать маску по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизировать в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.

Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адрес производства

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,

245413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасуское,

стационар Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организации для принятия претензий от потребителей

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,

109052, г. Москва, ул. Новохолевская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10

http://www.endorham.ru

Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40593587-2020

Тип II по ГОСТ Р 58396-2019

РУ №

Срок годности 3 года с даты изготовления

Штрих-код

Дата изготовления

№ партии:

Дополнительно допускается нанесение знаков добровольной или международной сертификации



Е.А. Ежова

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия

С. 8

Маркировка первичной упаковки - печать на пакет, этикетка для пакета

ФГУП «Московский эндокринный завод»

**Маска медицинская стерильная
одноразового использования**

100 пакетов по 1 маске

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекции, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения: - использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
- 1-й слой (лицу, неокрашенный) - спанбонд;
- 2-й слой - фильтрующий (СМС, мелиблан) - антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрашенный) - спанбонд.

Правила хранения и транспортирования
Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Условия хранения: - 1 (I) по ГОСТ 15150.
Условия транспортирования: - 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия
А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,0 см x 15,0 см, с логотипом или без логотипа.
Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см, с логотипом или без логотипа.
*вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы
1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.
2. Вскрыть упаковку, извлечь изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Принять носовой зажим (фиксатор) и переносице.
Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.
После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания:
- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделия в составе комплекта.

Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Способы утилизации
Не использовать по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адрес производства
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасуское,
территория Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б


Организация для принятия претензий от потребителей
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,
109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endocrin.ru>

Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

Срок годности 3 года с даты изготовления.

Штрих-код

Дата изготовления
№ партии:

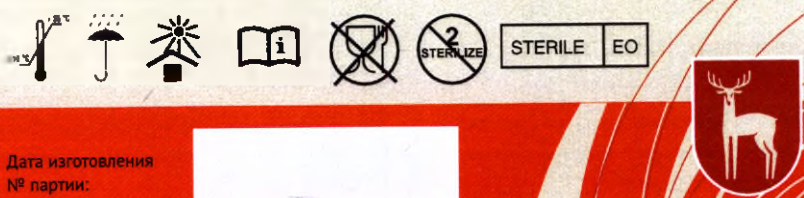

Дополнительно допускается нанесение знаков
добровольной международной сертификации



Е.А. Ежова

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»
000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка первичной упаковки - печать на пакет, этикетка для пакета

ФГУП «Московский эндокринный завод»
Маска медицинская стерильная
одноразового использования
20 пакетов по 1 маске
ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения: использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных, лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
- 1-й слой (клин, неокрашенный) – спанбонд;
- 2-й слой – фильтрующий (СМС, мелиблан) – антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд.

Правила хранения и транспортирования
Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
Условия хранения – 1 (I) по ГОСТ 15150.
Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия
А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,0 см x 15,0 см, с логотипом или без логотипа.
Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см, с логотипом или без логотипа.
*вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы
1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.
2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.
Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.
После применения маску утилизируют согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые показатели к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания:
- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделий в составе комплекта.

Условия утилизации
Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адреса производства
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасуское,
территория Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,
109052, г. Москва, ул. Новохохолская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endorpham.ru>

Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип I по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

Срок годности 3 года с даты изготовления.



STERILE EO

Штрих-код

Дата изготовления
№ партии:



Дополнительно допускается нанесение знаков
добровольной или международной сертификации



Е.А. Ежова

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия

С. 10

Маркировка первичной упаковки - печать на пакет. этикетка для пакета

ФГУП «Московский эндокринный завод»
Маска медицинская стерильная
одноразового использования
50 пакетов по 1 маске
ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения – использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
- 1-й слой (клицу, неокрашенный) – спанбонд;
- 2-й слой – фильтрующий (СМС, мейлблэун) – антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд.

Правила хранения и транспортирования
Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохраняя от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
Условия хранения – 1 (У) по ГОСТ 15150.
Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия
А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,0 см х 15,0 см, с логотипом или без логотипа.
Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,5 см х 17,5 см, с логотипом или без логотипа.
*вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы
1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.
2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Принять носовой зажим (фиксатор) к переносице.
Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.
После применения маску утилизируют согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания:
- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделий в составе комплекта.


Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации
Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адреса производства
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, территория Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endokrin.ru>
Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип I по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

Срок годности 3 года с даты изготовления.

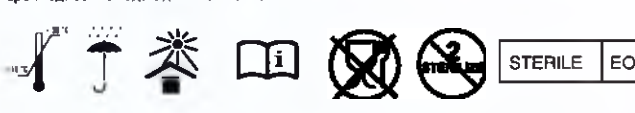

Дата изготовления
№ партии:



Штрих-код

Дополнительно допускается нанесение знаков
добровольной или международной сертификации

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»



Е.А. Ежова

**Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия**

Маркировка первичной упаковки - печать на пакет. этикетка для пакета

ФГУП «Московский эндокринный завод»

**Маска медицинская стерильная
одноразового использования**

100 пакетов по 1 маске

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекции, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения: — использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
- 1-й слой (внутренний, неокрашенный) — спанбонд;
- 2-й слой — фильтрующий (СМС, мелtblau) — антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрашенный) — спанбонд.

Правила хранения и транспортирования
Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
Условия хранения — 1 (л) по ГОСТ 15150.
Условия транспортирования — 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия
А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,0 см x 15,0 см, с логотипом или без логотипа.
Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см, с логотипом или без логотипа.
* вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы
1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.
2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.
Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.
После применения маску утилизируют согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания:
- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделий в составе комплекта.


Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации
Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адрес производства
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасужское, территория Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новоохотловская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endorpharm.ru>
Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип I по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

Срок годности 3 года с даты изготовления.

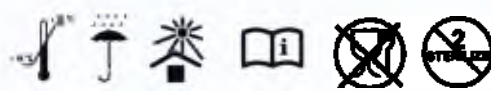
STERILE EO

Дата изготовления
№ партии:



Дополнительно допускается нанесение знаков добровольной или международной сертификации



Е.А. Ежова

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маркировка первичной упаковки - печать на пакет. этикетка для пакета

ФГУП «Московский эндокринный завод»
Маска медицинская стерильная
одноразового использования
20 пакетов по 1 маске
ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения: - использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
- 1-й слой (к лицу, неокрашенный) - спанбонд;
- 2-й слой - фильтрующий (СМС, мелальбум) - антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрашенный) - спанбонд.

Правила хранения и транспортирования
Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
Условия хранения - 1 (л) по ГОСТ 15150.
Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия
А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,0 см x 15,0 см, с логотипом или без логотипа.
Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см, с логотипом или без логотипа.
*вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы
1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.
2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.
Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.
После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания:
- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделий в составе комплекта.

Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации
Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адреса производства
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасужское, территория Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б
Организация для принятия претензий от потребителей
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новоохотловская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endorpharm.ru>
Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

Срок годности 3 года с даты изготовления.

Штрих-код

Дата изготовления
№ партии:





Дополнительно допускается нанесение знаков
добровольной или международной сертификации

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»



Е.А. Ежова

**Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия**

Маркировка первичной упаковки - печать на пакет, этикетка для пакета

ФГУП «Московский эндокринный завод»
Маска медицинская стерильная
одноразового использования

50 пакетов по 1 маске

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения: использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
- 1-й слой (в лицевую окраску) – спанбонд;
- 2-й слой – фильтрующий (СМС, мелtblau) – антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд.

Правила хранения и транспортирования
Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
Условия хранения – 1 (I) по ГОСТ 15150.
Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия
А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,0 см х 15,0 см, с логотипом или без логотипа.
Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,5 см х 17,5 см, с логотипом или без логотипа.
*вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы
1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.
2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.
Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.
После применения маску утилизируют согласно действующим предписаниям.
Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания:
- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделий в составе комплекта.
Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации
Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адреса производства
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасусское,
территория Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б
Организация для принятия претензий от потребителей
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,
109052, г. Москва, ул. Новоохотловская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endorharm.ru>
Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

Срок годности 3 года с даты изготовления.







STERILE EO

Дата изготовления

№ партии:



Дополнительно допускается нанесение знаков
добровольной и/или международной сертификации



Е.А. Ежова

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маркировка первичной упаковки - печать на пакет, этикетка для пакета

ФГУП «Московский эндокринный завод»
Маска медицинская стерильная
одноразового использования
100 пакетов по 1 маске
ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения: - использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
- 1-й слой (в лицевую окрасочную) - спанбонд;
- 2-й слой - фильтрующий (СМС, мелиблану) - антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрасочный) - спанбонд.

Правила хранения и транспортирования
Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
Условия хранения - 1 (I) по ГОСТ 15150.
Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия
А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,0 см x 15,0 см, с логотипом или без логотипа.
Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см, с логотипом или без логотипа.
* вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы
1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.
2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.
Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.
После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.
Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания:
- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделий в составе комплекта.
Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации
Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адреса производства
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасукское,
территория Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б
Организация для принятия претензий от потребителей
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,
109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endorpharm.ru>
Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

Срок годности 3 года с даты изготовления.


STERILE EO

Дата изготовления
№ партии:



Штрих-код

Дополнительно допускается нанесение знаков
добровольной или международной сертификации



Е.А. Ежова

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП “Московский эндокринный завод”


полнительно допускается на
бровальную или международную

Е.А. Ежова

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП "Московский эндокринный завод"

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия
Макет упаковки - коробка картонная

С. 17

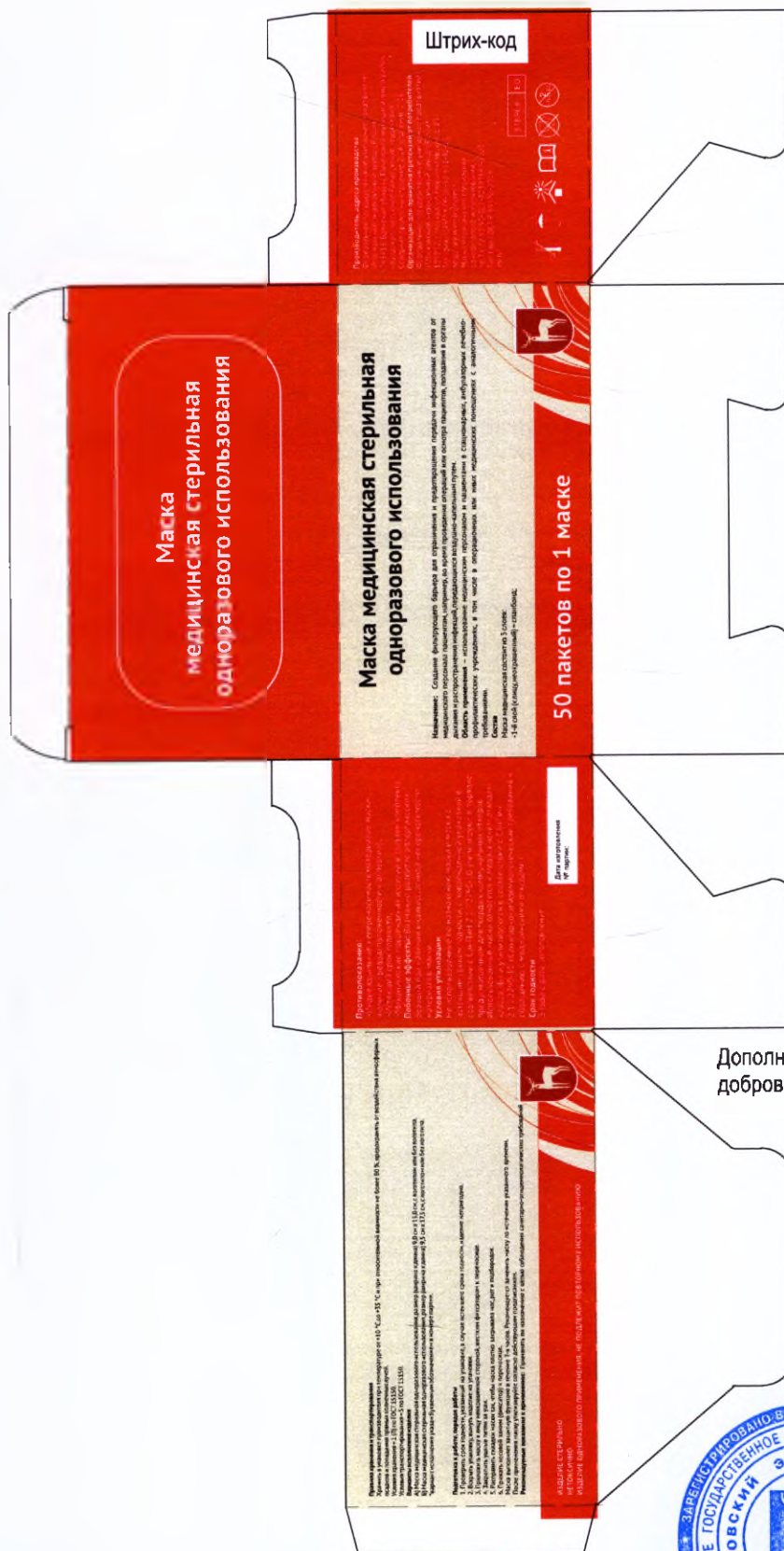

Дополнительно допускается нанесение знаков
добровольной и/или международной сертификации


Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»



Е.А. Ежова

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия
Макет упаковки - коробка картонная

С. 18

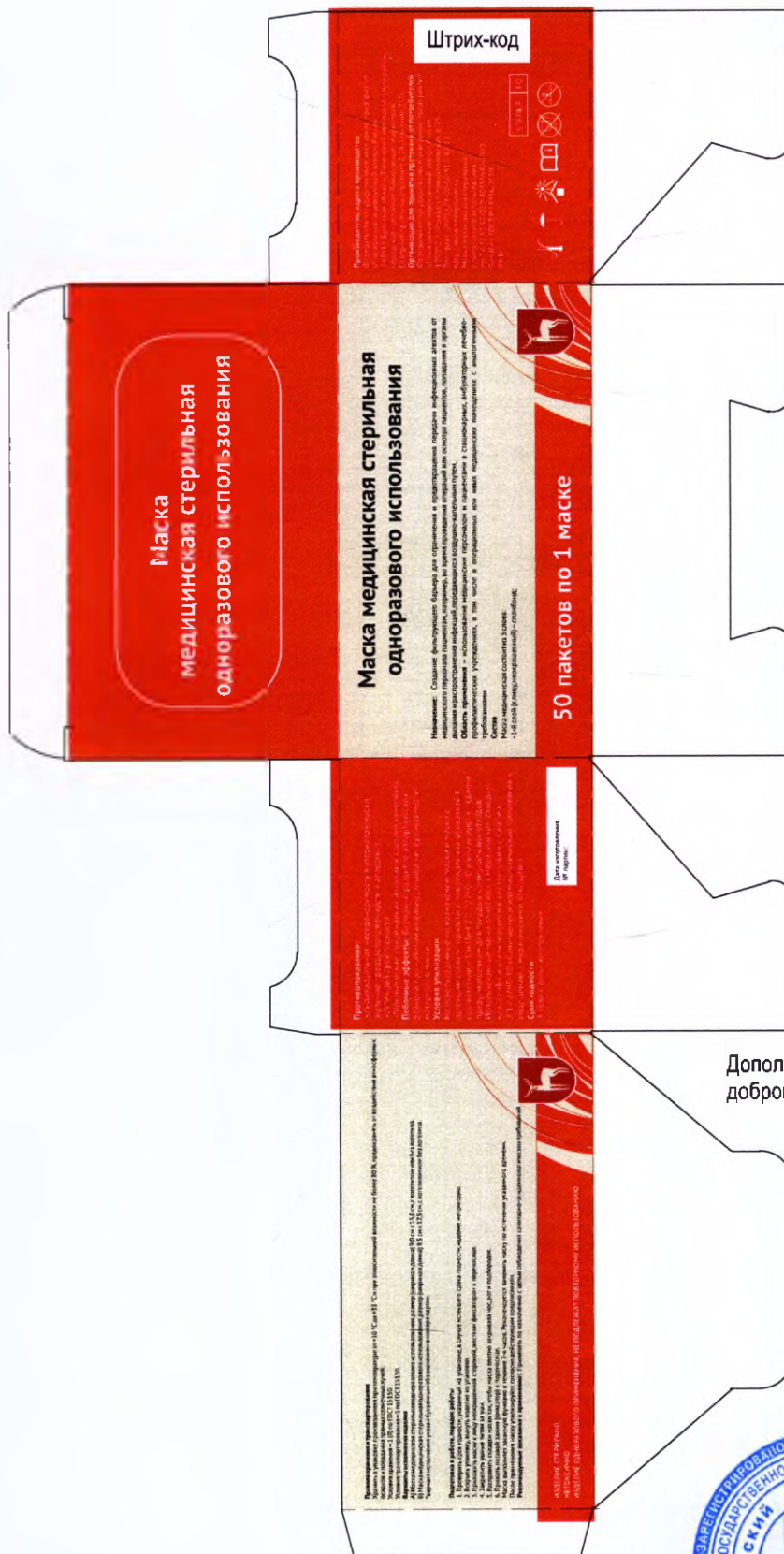

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»



Е.А. Ежова

ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020

ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия

Макет упаковки - коробки картонная

**Игла медицинская стерильная
одноразового использования**

10

100 пакетов по 1 маске

Дата изготовления
№ партии:

в случае, предусмотренных областями применения.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ПОДГОТОВЛЕНО
ПОДГОТОВЛЕНО ИСПОЛЗОВАНИЮ

PEUT
PHO
KON



The figure consists of two line graphs side-by-side. Both graphs have 'Percentage of respondents' on the y-axis (0 to 100) and 'Year' on the x-axis (1990 to 2004). The left graph shows a steady increase from 1990 to 2004. The right graph shows a sharp increase starting around 2001, reaching a peak in 2003, and then declining.

Year	U.S. should take action to reduce global warming	U.S. should not take action to reduce global warming
1990	60	38
1991	62	36
1992	64	34
1993	66	32
1994	68	30
1995	70	28
1996	72	26
1997	74	24
1998	76	22
1999	78	20
2000	80	18
2001	82	16
2002	84	14
2003	86	12
2004	84	14

U

RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Заместитель Генерального директора по развитию лекарственных препаратов ФГУП "Московский эндокринный завод"

A. Ежова

по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020

Макет упаковки - коробка картонная

Маска медицинская стерильная одноразового использования

Дата изготовления
№ партии:

АСД НЕ СТЕРИЛЬНО
НЕЗАКАЗНО
ИЗДАНИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖИТ
ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

五

STAFF

С. 10



1

1

1

II WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

WWW.OUSZDRYNADZOR.RU

Штрих-код

—

Year	Percentage of Population Aged 65 and Over
1950	7%
1960	10%
1970	12%
1980	14%
1990	16%
2000	18%
2020	20%

/

/

Ежова

по развитию лекарственных препаратов
ФГУП "Московский эндокринный завод"



2021 года


Фотографические изображения


**общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями,
необходимыми для применения медицинского изделия по назначению**

Маска медицинская

стерильная одноразового использования, по

ТУ 32.50.50-002-40393587-2020

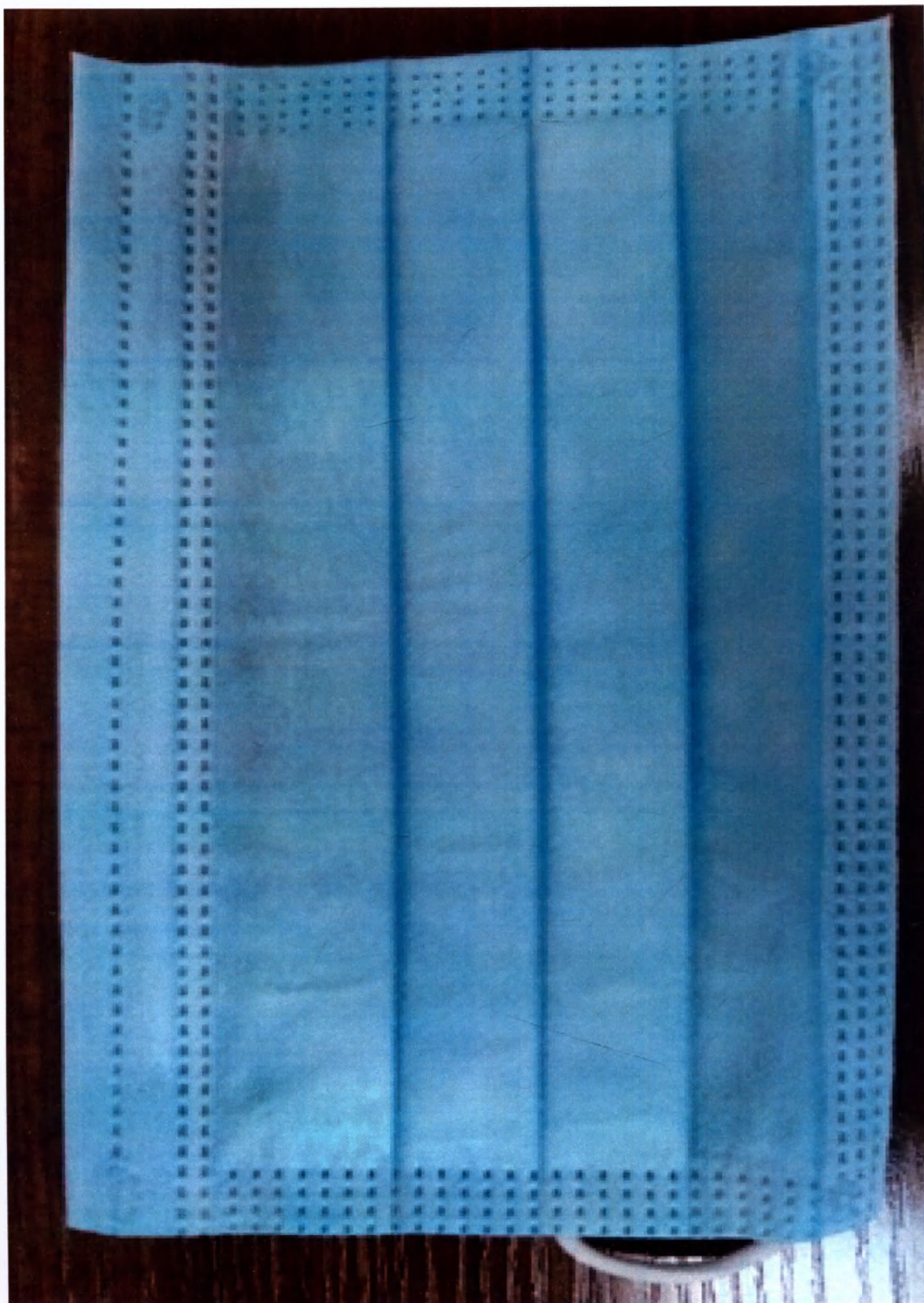


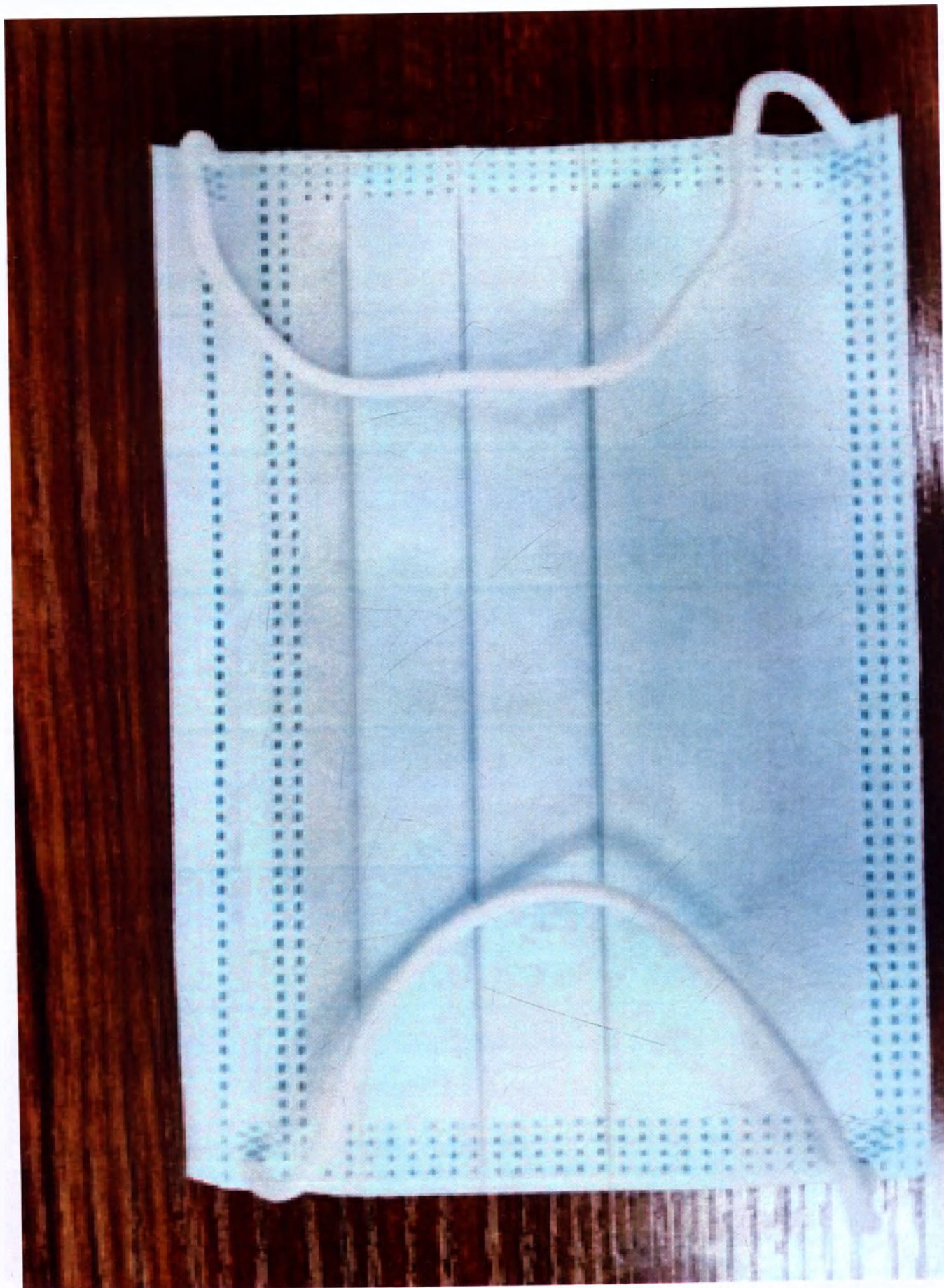






ФОТО

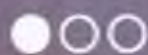

SHOT ON MI 9 SE
AI TRIPLE CAMERA

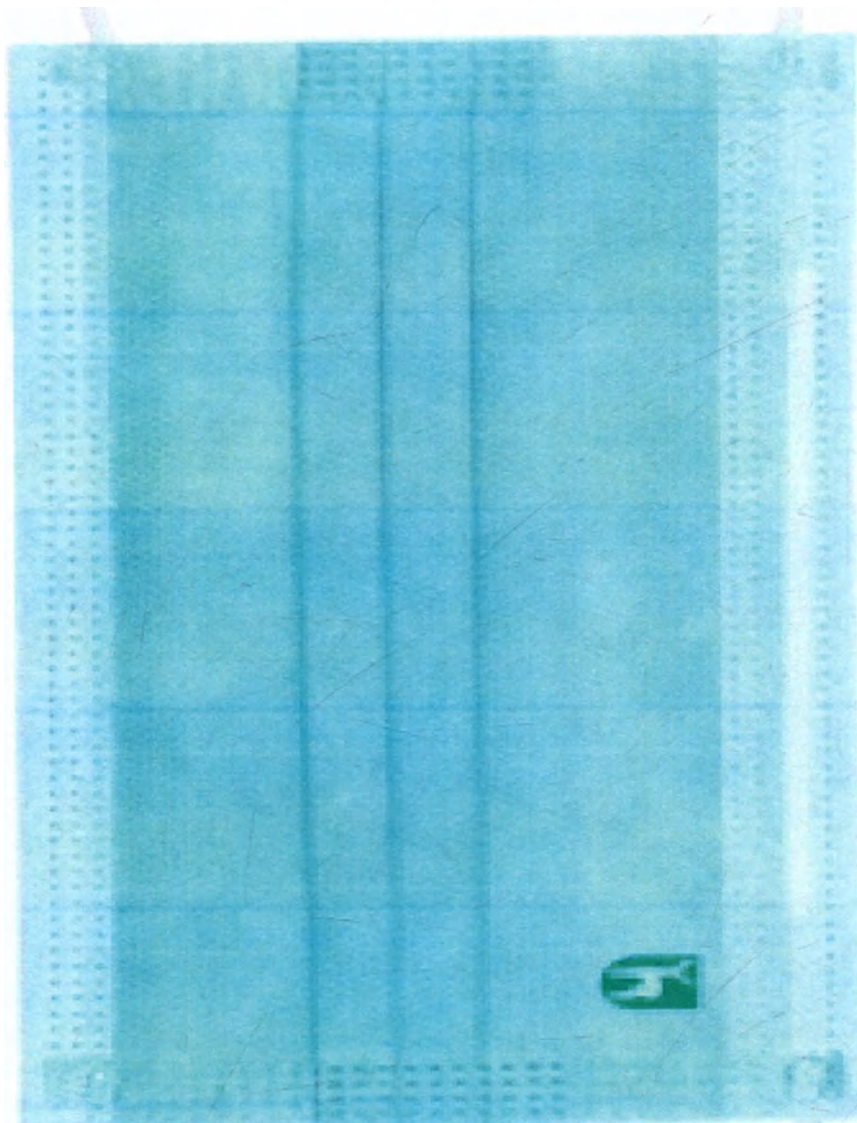



SHOT ON MI 9 SE
AI TRIPLE CAMERA





●○○ SHOT ON MI 9 SE
AI TRIPLE CAMERA

Маска медицинская стерильная
одноразового использования

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО

НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

НЕТОКСИЧНО

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения – использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав

Маска медицинская состоит из 3 слоев:

- 1-й слой (клетчатый, неокрашенный) – спанбонд
- 2-й слой – фильтрующий (СМС, мельбланш) – антибактериальный фильтр.
- 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд

Правила хранения и транспортирования

Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 90 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Условия хранения — 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150.


Варианты исполнения изделия

- б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,5 см х 17,6 см, с логотипом или без логотипа.

вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

1. Macroeconomics

Изготовитель, адрес производства:
 Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Московский эндокринный завод», Россия,
 125015, Московская область, Почепский муниципальный район,
 городское поселение Раменское, территория
 «Солнечный бережок», строение 2/2А, строение 2/2Б
 Организация для принятия претензий от потребителей:
 Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Московский эндокринный завод», Россия,
 125015, Московская область, Новохохловская, д. 25
 Контактный телефон: (95) 618-00-50/911-42-10
 E-mail: info@eoz.ru
 Метка медицинская стерильная одноразового использования,
 по ГОСТ 5050-062-403935872020
 Тип по ГОСТ Р 58196-2019
 RU

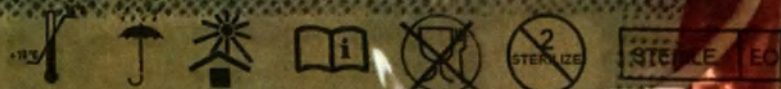

Срок годности 3 года с даты изготовления

Дата изготовления
 № партии:



Подготовьте изделие, порядок работы:
 1. Проверьте срок годности, указанный на упаковке, в случае истечения срока годности изделие не подлежит использованию.
 2. Снять упаковку, вынуть изделие из упаковки.
 3. Поднести маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
 4. Закрепить ушные петли за уши.
 5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала лицо и нос и подбородок.
 6. Проверить посадку жакета (фиксатор) к переносице.
 7. Маску использовать для защиты в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.
 После использования маску утилизируют в соответствии с требованиями.

Противопоказания:
 - Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие аллергии);
 - Истекший срок годности;
 - Механические повреждения изделий в составе комплекта.
 Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной гиперчувствительности к материалам маски.
 Условия хранения:
 Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для изделий медицинского назначения класса «В» (утилизуют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 и Санитарными правилами утилизации медицинских изделий).

Исходитель и адрес производителя

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область, Почепский муниципальный район,
поселок городского типа Рамасухское, территория
Сельского поселения, строение 2/2А, строения 2/2Б
Организация для принятия претензий от потребителей
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
243413, с/пос. Рамасухское, Новохохловский д. 25
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10

https://www.mozavr.ru
Маска медицинская стерильная одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тех. по ГОСТ Р 52804-2019
Р5000



Срок годности 3 года с даты изготовления

Дата изготовления
№ партии:

Правила применения, порядок работы

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности изделие не подлежит применению.
2. Вынуть изделие из упаковки.
3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
4. Закрепить ушные петли за уши.

5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно прилегала ко рту и подбородку.

6. Проверить посадку жестким (фиксатор) к переносице.

7. Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.

После использования маску утилизируют в соответствии с требованиями.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие противопоказаний к аллергии);

- Истекший срок годности;


- Механические повреждения изделий в составе комплекта.

Побочные эффекты: возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Важные указания:

Не использовать по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

В упаковке предусмотрено два варианта использования: для одноразового использования и для многоразового использования. Маски относятся к медицинским изделиям класса II и подлежат регистрации в СанПиН 2.1.7.2790-10.

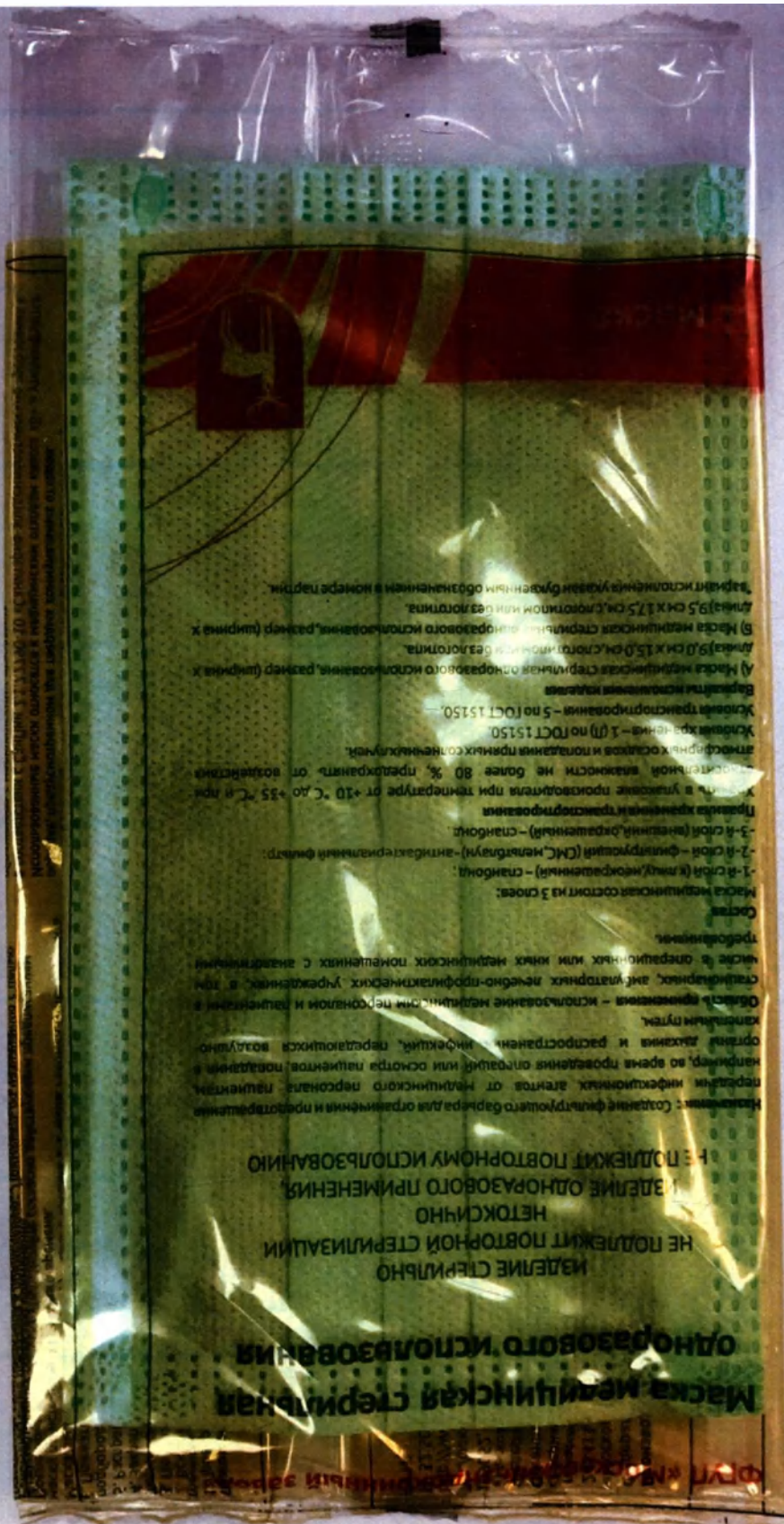

Маска медицинская стерильная **одноразового использования**

НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение: Создание барьера для предотвращения распространения и предотвращения переноса инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, находящимся во время проведения операций или осмотра пациентов, находящихся в состоянии ламинарии и распространения инфекции, передающихся воздушно-капельным путем.


Состав:
Маска медицинская состоит из 3 слоев:
- 1-й слой (внутренний) - стандарт;
- 2-й слой (фильтрующий) (СНГ, мембранный) - антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, наружный) - стандарт.


Применение: Маска предназначена для использования при проведении операций, а также в условиях производства при температуре от +10 °C до +35 °C и при относительной влажности не более 80 %, предотвращать от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Условия хранения: - 1 (шт) по ГОСТ 15150.
Условия транспортирования: - 5 по ГОСТ 15150.

Варианты использования: Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,0 см х 15,0 см, с лентой и без лент.

Варианты использования: Маска медицинская стерильная, размер (ширина х длина) 9,5 см х 17,5 см, с лентой или без лент.

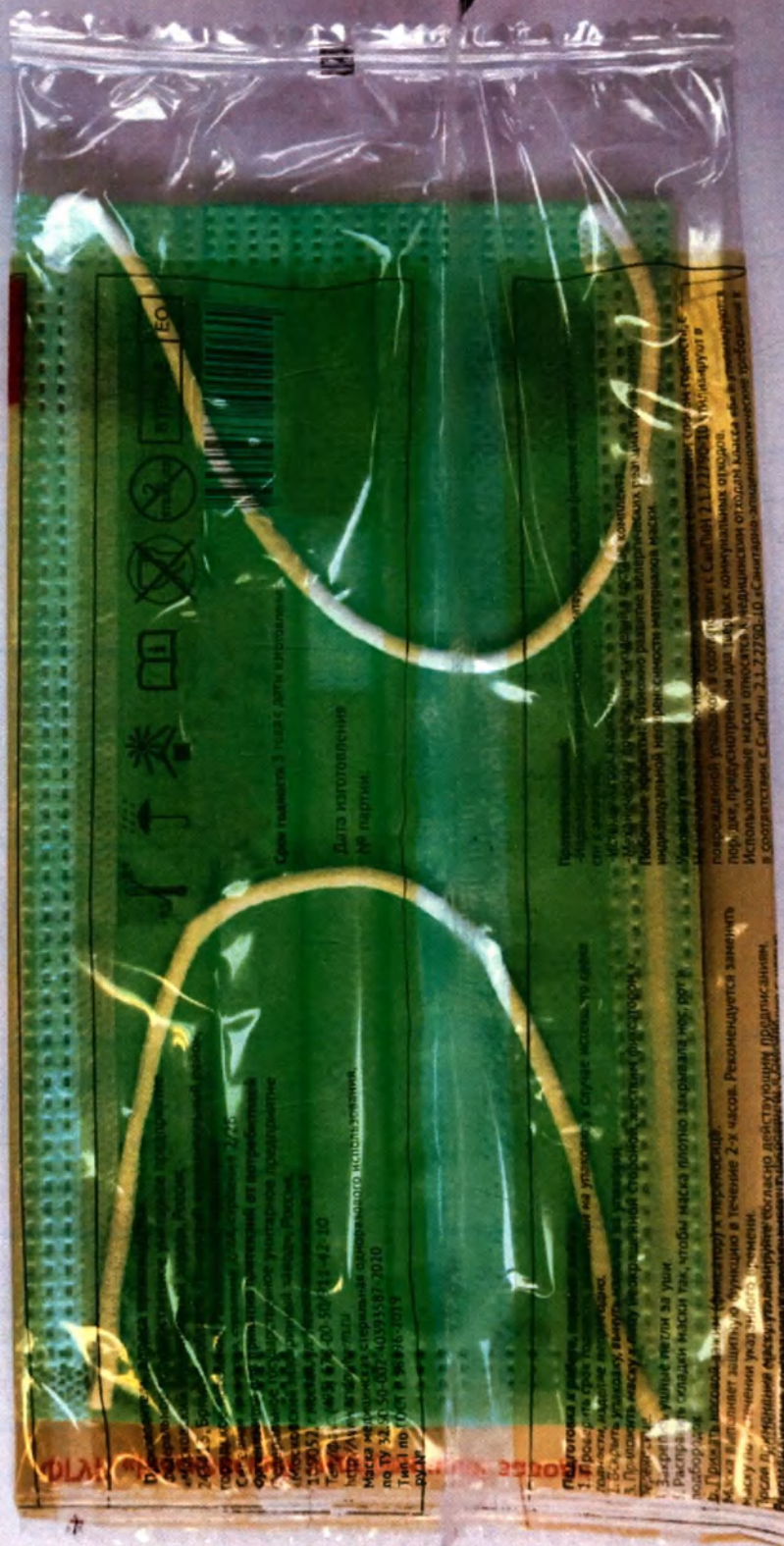

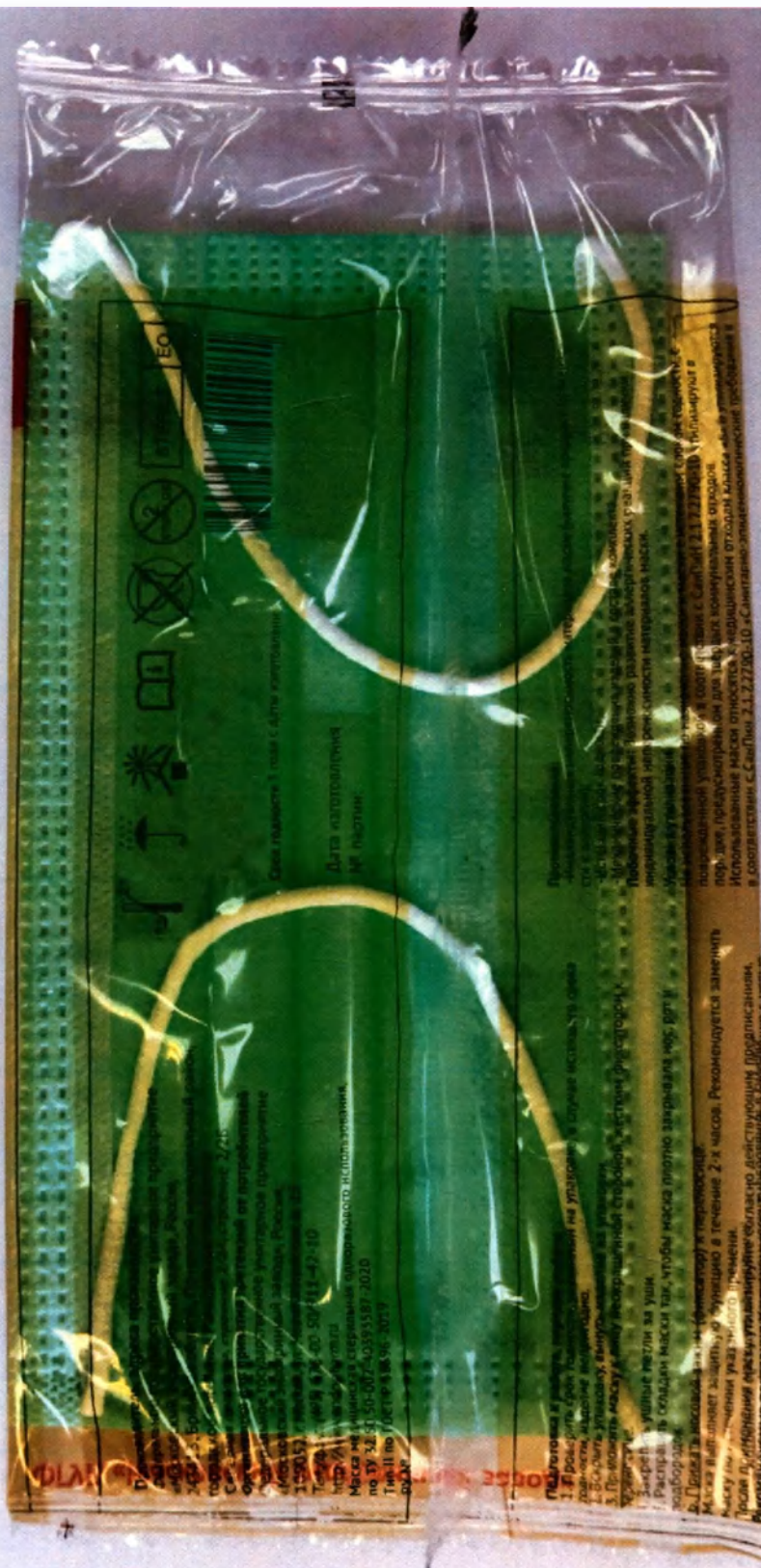

ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маска медицинская стерильная одноразового использования

20 пакетов по 1 маске

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекции.

Область применения: — использование медицинским персоналом в стационарах, амбулаториях, лечебно-профилактических учреждениях, а также в операционных и других медицинских помещениях с выделительными проблемами.

Состав:

Маска медицинская состоит из 3 слоев:

- 1-й слой (внутренний) — хлопчатобумажный;
- 2-й слой — фильтрующий (СМ, меллотелулоз) — антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, внешний) — хлопчатобумажный.

Правила хранения и транспортирования:

Хранить в упаковке при температуре от +20 °C до +35 °C и при относительной влажности не более 80 %, защищая от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Условия хранения — 1 (I) по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования — 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделий:

- А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,0 см x 15,0 см, с логотипом или без логотипа.
- Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см, с логотипом или без логотипа.

Надпись «Исполнение» указан буквенным обозначением в центре логотипа.

Подготовка к работе, порядок работы:

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истечения срока годности, изделие непригодно.
2. Вынуть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
3. Поднять маску к лицу неопытной стороной, захватив фиксатором за лямочки.
4. Закрыть ушные петли за уши.
5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
6. Проверить плотность прилегания (фитинг) к лицу.

Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.

После применения маску утилизируют согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые указания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областями применения.

Противопоказания:

— Индивидуальная непереносимость материалов маски (таблица предоставляется к упаковке).

— Аллергический срок годности.

— Механические повреждения изделия в составе комплекта.

Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Утилизация:

Не использовать по назначению маски и маски с истечением срока годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.790-90.

Использование маски относится к медицинским отходам класса «Б» и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.790-90 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Примечания, адреса изготовителя:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 249413, Брянская область, Починковский муниципальный район, городское поселение Романовское, территория Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б.

Организация для приема претензий от потребителей:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Нововокзальная, д. 25. Тел/факс: (495) 678-06-30/911-41-10.

Маска медицинская стерильная однократного использования, по ТУ 31.50.50-002-40391587-2020.

Тех. Ин. ГОСТ Р 58396-2019.

РУ №

Срок годности 3 года с даты изготовления.



Штрих-код

Дата изготовления
ИЗДЕЛИЕ



ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маска медицинская стерильная одноразового использования

20 пакетов по 1 маске

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения инъекций или осмотра пациента, находящегося в органе дыхания и распространения инфекции, термическим воздействием на слизистую оболочку.

Область применения: использование медицинскими персоналом и пациентами в стационарных амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, а также в операционных отделениях медицинских учреждений с аналогичными требованиями.

Состав:

Маска медицинская состоит из:

- 1-й слой (внутренний) - фильтрующий;

- 2-й слой (внутренний) - фильтрующий;

- 3-й слой (внешний, окрасочный) - стандарт.

Правила хранения и транспортировки:

Хранить в упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и при относительной влажности не более 80 %, предохраняющей изделие от воздействия влаги.

Упаковка - 20 шт. по ГОСТ 15150.

Упаковка транспортировочная - 5 по ГОСТ 15150.

Важнейшие свойства изделия:

А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 10 см x 13,5 см, эластичная или безэластичная.

Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 10 см x 13,5 см, из нетоксичного материала.

Упаковка - 20 шт. по ГОСТ 15150.

Подготовка к работе, порядок работы:

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истечения срока годности, изделие непригодно.

2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.

3. Проверить маску и лицо пациента на наличие повреждений, наличие фиксаторов и переноски.

4. Закрепить ушные петли за уши.

5. Раскрыть складку маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.

6. Прикрыть носовой зажим (фиксатор) и подпереть.

Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.

После применения маску утилизируют согласно действующим нормативам.

Рекомендуемые показания к применению: Помогает при контакте с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость материалов маски (например, чувствительность к аллергии).

- Истечение срока годности.

- Наличие повреждений изделия и сильное загрязнение.

Побочные эффекты: Возможны развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Упаковка и транспортировка:

не использованная по назначению маска и маска с истечшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.790-10 утилизируются в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.

Использованная маска помещается в медицинский отход класса «Б» и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адрес производства:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия.

243413, Брянская область, Печенский муниципальный район, поселок поселение Речное, переулок Спортивный, строение 2/ОА, строение 1/ОБ.

Организационная принадлежность от принадлежности:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия.

109052, г. Москва, ул. Новодорожская, д. 21, Тел./факс: (495) 478-60-50/478-60-50.

http://www.endo.ru

Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 52.56.50-002-4099587-2020

Всё в 1 по ГОСТ Р 55386-2029

РП 10

Срок годности 3 года с даты изготовления.

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

РП 10


РП 10

РП 10

РП 10

РП 10

Штрих-код

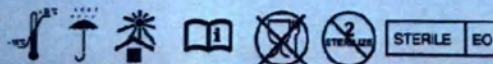

ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маска медицинская стерильная одноразового использования

50 пакетов по 1 маске

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время оказания помощи или осмотра пациента, находящегося в органе дыхания и распространения инфекции, предотвращения воздушно-капельного пути.

Область применения: использование медицинскими персоналом и пациентами в стационарах, амбулаториях, лабораториях, профилактических учреждениях, а также в сфере оказания неотложной медицинской помощи и неотложных врачебных вмешательств.

Состав:

Маска повязочная состоит из 3 слоев:

- 1-й слой (внутренний) - нетканый;

- 2-й слой - фильтрующий (СЭС, мембранный) - нетканый с перфорацией;

- 3-й слой (внешний, окрасочный) - спандекс.

Правила хранения и транспортирования:

Хранить в упаковке при температуре от +12 °C до +15 °C и при относительной влажности не более 80 %, предохраняя от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Упаковочное количество - 1 шт. по ГОСТ 15150.

Упаковочное количество - 5 шт. по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия:

А) Маска медицинская стерильная повязочная с петлями, размер упаковки (длина) 9,0 см и 15,0 см с логотипом или без логотипа.

Б) Маска медицинская стерильная повязочная с застежкой, размер упаковки (длина) 9,5 см и 17,5 см с логотипом или без логотипа.

* Вероятно истончение упаковки в процессе обращения в течение срока.

Подготовка к работе, порядок работы:

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истечения срока годности изделие непригодно.

2. Проверить упаковку, вынуть изделие из упаковки.

3. Проверить наличие и вид маркировки (цветной маркировки) упаковки с персоналом.

4. Проверить, чтобы упаковка была герметична, не повреждена.

5. Проверить, чтобы упаковка была герметична.

Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.

Маска предназначена для использования в соответствии с инструкцией по применению. Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случае, предусмотренных областями применения.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие гиперчувствительности к аэрогенам);

- Истечение срока годности.

Маска предназначена для использования в составе комплекта.

Побочные эффекты: Возможны реакции гиперчувствительности при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Правила утилизации:

Не использовать по назначению маски и маски с истечением срока годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.2.790-10.

Утилизировать в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.

Использованные маски упаковать в медицинский отход класса «Б» и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.2.790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель, адрес производства:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 243411, Брянская область, Починковский муниципальный район, поселок поселение Ремесленское.

территория Самарская провинция, страна USA, страница 2/28

Организация для приема претензий от потребителей:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 243411, г. Москва, ул. Новоселовская, д. 23 (тел./факс: +7(90) 678-00-507911-42-18)

http://www.mozdrav.ru

Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.50.30-202-4639534-7-2020

Тип 1 по ГОСТ 38194-2019

РМ

Срок годности 3 года с даты изготовления.

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ

РМ


Штрих-код

Дата изготовления

№ партии:

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Штрих-код

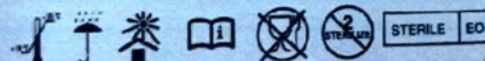

ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маска медицинская стерильная одноразового использования

100 пакетов по 1 маске

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание фактурного барьера для предотвращения и блокирования передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или помощи пациентам, находящимся в броне защиты и радиационной инфекции.

Область применения: использование медицинскими персоналом и посетителями в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с дополнительными требованиями.

Состав

Маска медицинская состоит из 3 слоев:

- 1-й слой (внутренний) – спанбонд;
- 2-й слой – фильтрующий (СМС, меллблэу) – антибактериальный фильтр;
- 3-й слой – внешний (наружный) – спанбонд.

Правила хранения и транспортирования

Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °C до +35 °C и при относительной влажности не более 80 %, защищая от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Упаковка крафтовая – 1 шт. по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия

- А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер диаметра (длина) 9,8 см x 11,6 см, с лямками или без лямки.
- Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер диаметра (длина) 9,3 см x 11,5 см, с лямками или без лямки.

* Размер диаметра указан буквенно-цифровым кодом на упаковке.

Подготовка к работе, порядок работы

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истечения срока – отбраковать изделие.

2. Открыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.

3. Проверить маску и лицо поочередно с каждой стороны, жестким фиксатором к переносице.

4. Закрыть ушные петли за ушами.

5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.

6. Проверить носовую лямку (эластичную) и переносицу.

Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.

После применения маску утилизируют согласно инструкции производителя.

Рекомендуемые условия и применение: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания

— индивидуальная непереносимость материалов маски (заключение о предрасположенности к аллергии);

— истекший срок годности;

— механические повреждения изделия в процессе хранения.

Побочные эффекты: Возможны реакции аллергического характера при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации

По истечении срока годности маски и маски с истекшим сроком годности, с маркировкой упаковки в соответствии с СанПиН 1.1.72.790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.

Использование маски влечет за собой ответственность за нарушение в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Примечания, другие примечания

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,

243411, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамское,

поселок Гавриловское, переулок 2/2А, строение 1/2Б.

Организация для приема заказов от потребителей

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,

109021, г. Москва, ул. Нижинская, д. 25 Тел/факс: (495) 476-60-60/951-42-40

<http://www.endo-farm.ru>

Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 32.10.50-002-40/95387-2029

Тип: по ГОСТ Р 58156-2019

ИУ №

Срок годности 3 года с даты изготовления.

Штрих-код



Дата изготовления
ИУ №



ФГУП «Московский эндокринный завод»

Маска медицинская стерильная одноразового использования

100 пакетов по 1 маске

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Назначение: Создание физикохимического барьера для ограничения и предупреждения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, пораженных в органы дыхания и респираторными инфекцией, предотвращения распространения возбудителей туберкулеза.

Область применения: — использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с повышенными требованиями.

Состав

Маска медицинская состоит из 3 слоев:

— 1-й слой (внутренний) — фильтрующий — нетканый;

— 2-й слой (фильтрующий) (СЭС, нетканый) — антибактериальный фильтр;

— 3-й слой (внешний, наружный) — нетканый.

Применение и транспортирование

Хранить и использовать изделие при температуре от +10 °C до +15 °C при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Упаковка — 1 шт по ГОСТ 23150.

Срок годности изделия — 5 лет по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия

А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (длина изделия) 9,0 см ± 1,0 см, ширина 11,0 см ± 1,0 см, с ленточным креплением.

Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (длина изделия) 9,5 см ± 1,0 см, ширина 11,5 см, с ленточным креплением.

Маски изготовлены из нетканых материалов, обеспечивающих в течение срока годности.

Подготовка к работе, порядок работы

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истечения срока годности изделие непригодно.

2. Проверить упаковку изделия на целостность.

3. Приложить маску к лицу не касаясь внутренней стороны, надеть фиксаторы в ушные раковины.

4. Завязать ремешки за уши.

5. Расправить изделие таким образом, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.

6. Проверить герметичность (присосать и отпустить).

После выполнения процедуры фиксации в течение 1 мин. изделие должно плотно прилегать к лицу.

После применения маску утилизируют согласно действующим требованиям.

Рекомендуемые условия и применение: (применять по назначению) с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);

— истечение срока годности;

— механические повреждения изделия в составе комплекта.

Побочные эффекты: Возможны развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Правила применения

Не использовать по назначению маски и маски с истечением срока годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Использовать в порядке, предусмотренном для подобных медицинских изделий.

Использование маски относится к медицинским изделиям класса «В» и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения».

Примечание, версия приложения

Образование государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,

143412, Московская область, Гатчинский муниципальный район, поселение Раменское,

территория Самаркино, строение 2/2А, строение 2/7Б.

Организация для принятия претензий от потребителей.

Образование государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия,

125012, г. Москва, ул. Новинковский, д. 25 Тел./факс: (495) 478-90-58/911-42-40

http://www.ezdrav.ru

Маска медицинская стерильная одноразового использования, по ТУ 12.30.39-002-0091597-0126

Тел. 8 по ГОСТ Р 18796-0219

Р/м:

Срок годности 3 года с даты изготовления.

Штрих-код



Дата изготовления
Идентификация



Маска
медицинская стерильная
одноразового использования

Маска медицинская стерильная одноразового использования

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в организм человека и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения – использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав

Маска медицинская состоит из 3 слоев:

- 1-й слой (к лицу, неокрашенный) – спанбонд;
- 2-й слой – фильтрующий (СМС, мелтблаун) – антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд.

20 пакетов по 1 маске



Правила хранения и транспортирования

Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия

А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,0 см x 15,0 см, с логотипом или без логотипа.

Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см, с логотипом или без логотипа.

*вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.

2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.

3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.

4. Закрепить ушные петли за уши.

5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.

6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.

Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.

После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделий в составе комплекта.

Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации

Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.

Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Срок годности

3 года с даты изготовления.

**Дата изготовления
№ партии:**

Производитель, адреса производства

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область, Почепский муниципальный район,
городское поселение Рамасухское, территория
Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endopharm.ru>

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип I по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

STERILE	EO
---------	----



Штрих-код

Производитель, адреса производства

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область, Почепский муниципальный район,
городское поселение Рамасухское, территория
Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endopharm.ru>

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

STERILE	EO
---------	----



Штрих-код

**Маска
медицинская стерильная
одноразового использования**

Маска медицинская стерильная одноразового использования

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения: использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав

Маска медицинская состоит из 3 слоев:

- 1-й слой (внутренний, контактирующий) – спанбонд;
- 2-й слой – фильтрующий (СМГ, мелкий бланк) – антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрасочный) – спанбонд.

50 пакетов по 1 маске



Правила хранения и транспортирования

Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранить от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия

А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,0 см x 15,0 см, с логотипом или без логотипа.

Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см, с логотипом или без логотипа.

*вариант исполнения указан буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.

2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.

3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.

4. Закрепить ушные петли за уши.

5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.

6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.

Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.

После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделий в составе комплекта.

Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации

Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.

Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Срок годности

3 года с даты изготовления.

Дата изготовления
№ партии:

Производитель, адреса производства

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область, Почепский муниципальный район,
городское поселение Рамасухское, территория
Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10

<http://www.endopharm.ru>

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020

Тип I по ГОСТ Р 58396-2019

РУ №

STERILE	EO
---------	----



Штрих-код

Производитель, адреса производства

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область, Почепский муниципальный район,
городское поселение Рамасухское, территория
Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endopharm.ru>

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

STERILE	EO
---------	----



Штрих-код

Маска
медицинская стерильная
одноразового использования

Маска медицинская стерильная одноразового использования

Назначение: Создание фильтрующего барьера для ограничения и предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала пациентам, например, во время проведения операций или осмотра пациентов, попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения – использование медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе в операционных или иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Состав

Маска медицинская состоит из 3 слоев:

- 1-й слой (внутренний, неокрашенный) – спанбонд;
- 2-й слой – фильтрующий (СМС, нетканый) – антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд.

100 пакетов по 1 маске



Правила хранения и транспортирования

Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Варианты исполнения изделия

А) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,0 см х 15,0 см, с логотипом или без логотипа.

Б) Маска медицинская стерильная одноразового использования, размер (ширина х длина) 9,5 см х 17,5 см, с логотипом или без логотипа.

*вариант исполнения указать буквенным обозначением в номере партии.

Подготовка к работе, порядок работы

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.

2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.

3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.

4. Закрепить ушные петли за уши.

5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.

6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.

Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени.

После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Рекомендуемые показания к применению: Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖИТ
ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделия в составе комплекта.

Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Условия утилизации

Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.

Использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Срок годности

3 года с даты изготовления.

Дата изготовления
№ партии:

Производитель, адреса производства

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область. Почепский муниципальный
район, городское поселение Рамасухское, территория
Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-17-10

<http://www.endopharm.ru>

Маска медицинская стерильная
одноразового использования,
по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020
Тип I по ГОСТ Р 58396-2019
РУ №

STERILE

EO



Штрих-код

Производитель, адреса производства

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область, Почепский муниципальный
район, городское поселение Рамасухское, территория
Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б

Организация для принятия претензий от потребителей

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,

109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25

Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10

<http://www.endopharm.ru>

Маска медицинская стерильная

одноразового использования,

по ТУ 32.50.50-002-40393587-2020

Тип II по ГОСТ Р 58396-2019

РУ №

STERILE

EO



Штрих-код

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 34 листа(ов).
Заместитель Генерального
директора по развитию ЛП ФГУП
«Московский эндокринный завод»

Е.А. Ежова

24 февраля 2021 года


М.П.



**Фотографические изображения
образцов партий медицинского изделия
(пример упаковки по 20 полимерных пакетов в полиэтиленовом пакете)**

**Маска медицинская
стерильная одноразового использования, по
ТУ 32.50.50-002-40393587-2020**

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листа(ов).
Заместитель Генерального
директора по развитию ЛП ФГУП
«Московский эндокринный завод»

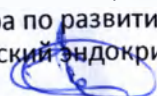 Е.А. Ежова

14 февраля 2021 года

М.П.

