


Фотоизображение медицинского изделия

Набор реагентов для бактериологических исследований

«Питательный агар для культивирования и выделения возбудителя бруцеллёза сухой» (Бруцеллагар)

по ТУ 9398-170-78095326-2012

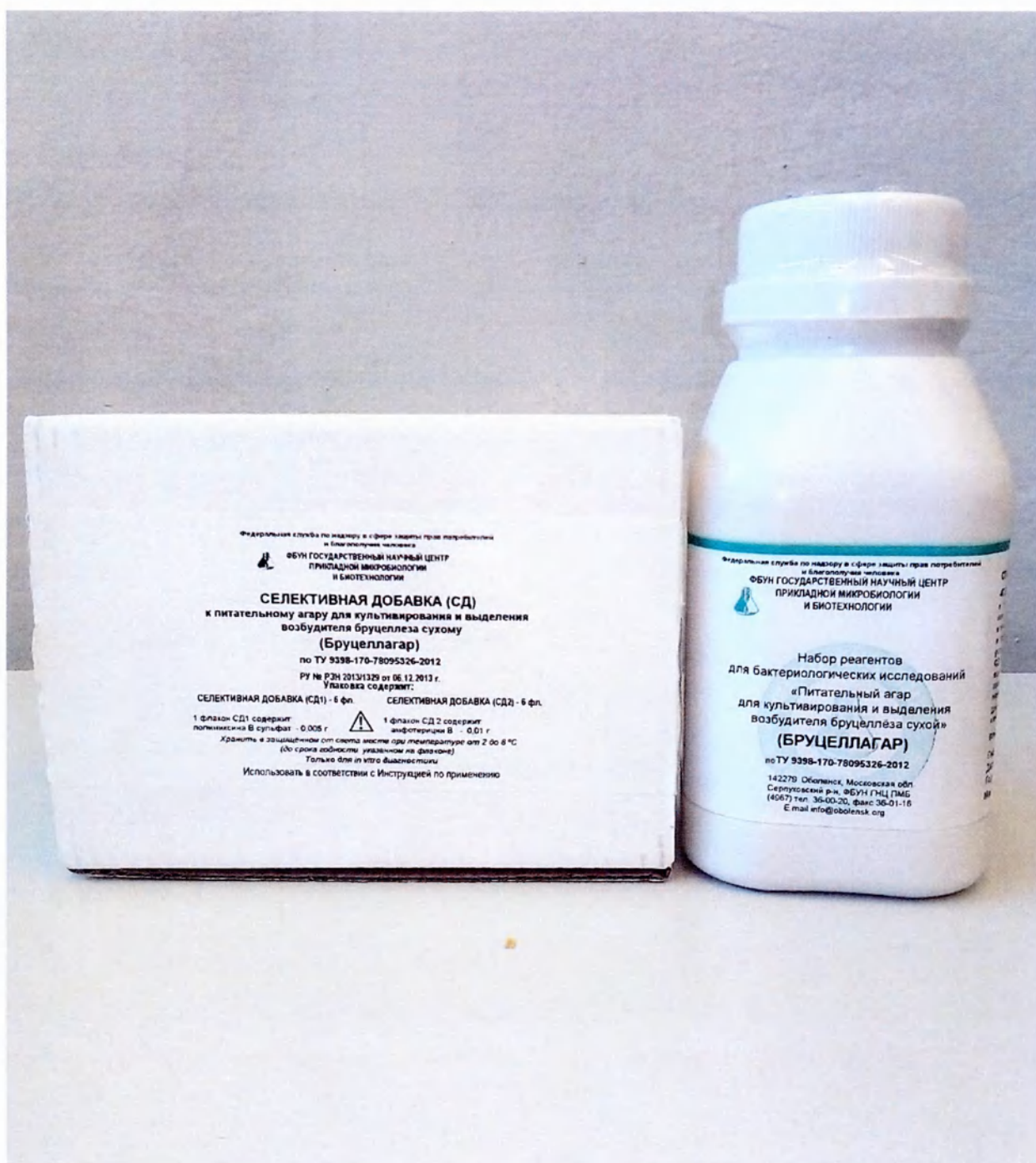


Общий вид упаковки

Фотоизображение медицинского изделия

Набор реагентов для бактериологических исследований

«Питательный агар для культивирования и выделения возбудителя бруцеллёза сухой» (Бруцеллагар)

по ТУ 9398-170-78095326-2012

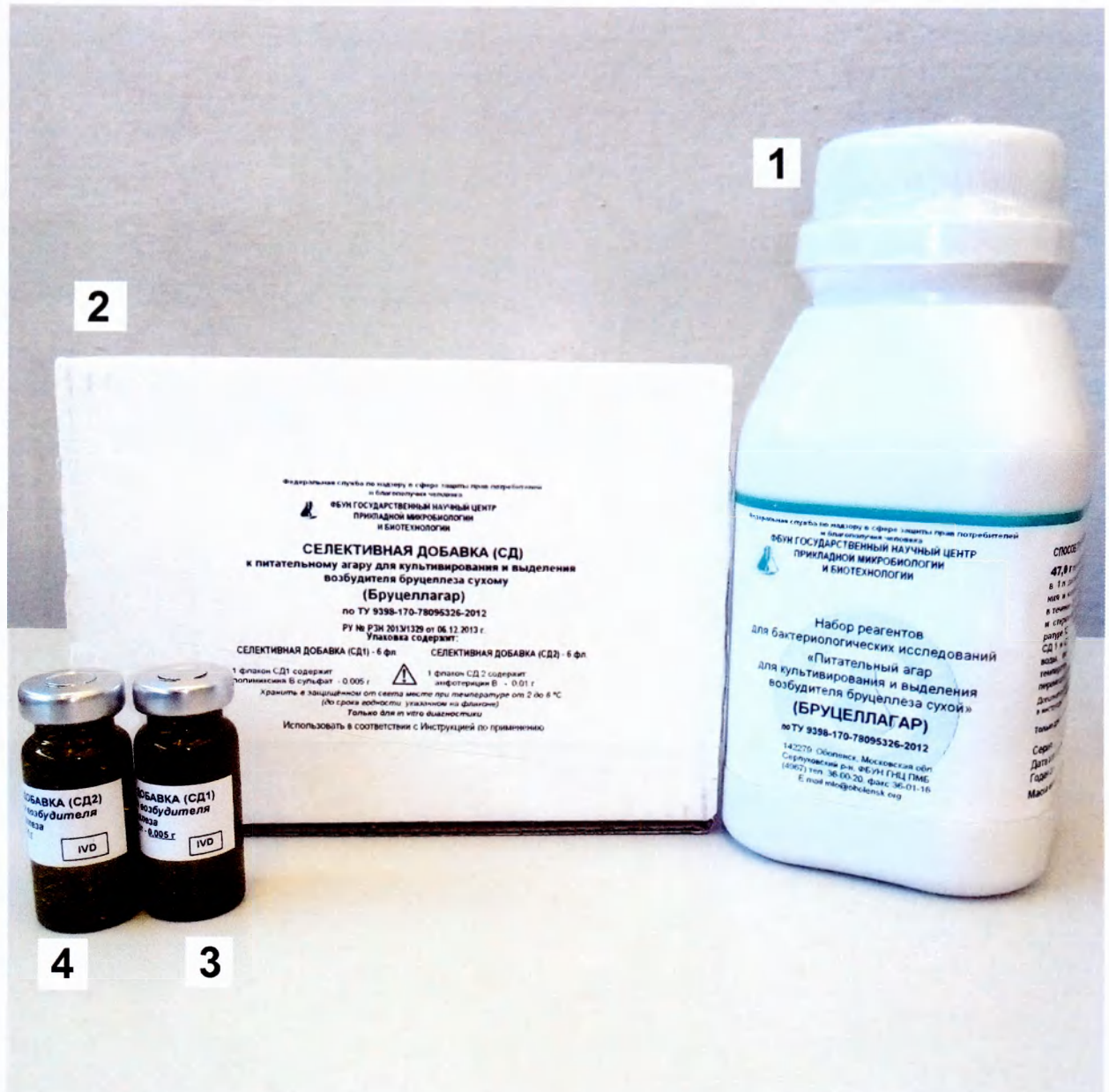

1. Банка с сухой средой
2. Коробка с флаконами

3. Флакон с селективной добавкой (СД1)
4. Флакон с селективной добавкой (СД2)

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено подписью и печатью
2 (два)
листов. Подпись И. В. Мещеряков
" 28 " мая 2019 г.



Образец маркировки медицинского изделия

Набор реагентов для бактериологических исследований

«Питательный агар для культивирования и выделения возбудителя бруцеллёза сухой» (Бруцеллагар)

по ТУ 9398-170-78095326-2012

<p>СОСТАВ, г/л:</p> <table><tr><td>Панкреатический гидролизат</td><td>7,5</td></tr><tr><td>рыбной муки</td><td>7,5</td></tr><tr><td>Пептон мясной</td><td>7,5</td></tr><tr><td>Панкреатический гидролизат</td><td>10,0</td></tr><tr><td>казеина</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Стимулятор роста гемофильных микроорганизмов</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Дрожжевой экстракт</td><td>3,0</td></tr><tr><td>Д-глюкоза</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Натрий хлористый</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Тиамин хлорид</td><td>0,005</td></tr><tr><td>meso-Erythritol</td><td>0,01</td></tr><tr><td>Натрий пироксернистоокислый</td><td>0,1</td></tr><tr><td>Агар</td><td>10,0±3,0</td></tr></table> <p>pH 7.3±0.2</p> <p><i>Препарат гигроскопичен, светочувствителен. Хранить герметически закрытым в сухом месте при температуре от 2 до 30°C.</i></p> <p>ПУ № РЗН 2013/1329 от 06.12.2013 г.</p>	Панкреатический гидролизат	7,5	рыбной муки	7,5	Пептон мясной	7,5	Панкреатический гидролизат	10,0	казеина	10,0	Стимулятор роста гемофильных микроорганизмов	5,0	Дрожжевой экстракт	3,0	Д-глюкоза	2,0	Натрий хлористый	3,5	Тиамин хлорид	0,005	meso-Erythritol	0,01	Натрий пироксернистоокислый	0,1	Агар	10,0±3,0	<p>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ</p>  <p>Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный агар для культивирования и выделения возбудителя бруцеллёза сухой» (БРУЦЕЛЛАГАР)</p> <p>по ТУ 9398-170-78095326-2012</p> <p>142279 Оболенск, Московская обл. Серпуховский р-н, ФБУН ГНЦ ПМБ (4967) тел. 36-00-20, факс 36-01-16 E-mail: info@obolensk.org</p>	<p>СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:</p> <p>Г питательной среды тщательно размешать в 1 л дистиллированной воды, нагреть до кипения и кипятить при постоянном перемешивании в течение 3 мин до полного расплавления агара и стерилизовать автоклавированием при температуре 121 °С в течение 15 мин. Во флаконы с СД 1 и СД 2 налить по 5 мл дистиллированной воды, внести в стерильный, охлажденный до температуры 50-55 °С Бруцеллагар, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри.</p> <p>Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.</p> <p>Только для <i>in vitro</i> диагностики.</p> <p>Серия..... Дата изготовления:.... Годен до:..... Масса нетто 250 г</p>
Панкреатический гидролизат	7,5																											
рыбной муки	7,5																											
Пептон мясной	7,5																											
Панкреатический гидролизат	10,0																											
казеина	10,0																											
Стимулятор роста гемофильных микроорганизмов	5,0																											
Дрожжевой экстракт	3,0																											
Д-глюкоза	2,0																											
Натрий хлористый	3,5																											
Тиамин хлорид	0,005																											
meso-Erythritol	0,01																											
Натрий пироксернистоокислый	0,1																											
Агар	10,0±3,0																											

Этикетка на банку с сухой средой

Образец маркировки медицинского изделия

Набор реагентов для бактериологических исследований

«Питательный агар для культивирования и выделения возбудителя бруцеллёза сухой» (Бруцеллагар)

по ТУ 9398-170-78095326-2012

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека



ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ

СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА (СД)

к питательному агару для культивирования и выделения
возбудителя бруцеллёза сухому
(Бруцеллагар)

по ТУ 9398-170-78095326-2012

РУ № РЗН 2013/1329 от 06.12.2013 г.

Упаковка содержит:

СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА (СД1) - 6 фл.

1 флакон СД1 содержит:
полимиксин В сульфат - 0,005 г



СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА (СД2) - 6 фл.

1 флакон СД 2 содержит:
амфотерицин В - 0,01 г

*Хранить в защищённом от света месте при температуре от 2 до 8 °С
(до срока годности, указанном на флаконе)
Только для in vitro диагностики*

Использовать в соответствии с Инструкцией по применению

Этикетка на коробку с флаконами

СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА (СД1)
для выделения возбудителя
бруцеллёза

Полимиксин В сульфат - 0,005 г
Годен до _____

IVD

Этикетка на флакон с СД1

СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА (СД2)
для выделения возбудителя
бруцеллёза

Амфотерицин В - 0,01 г
Годен до _____

IVD

Этикетка на флакон с СД2

Директор ФБУН ГНЦ ЦМБ

/Дятлов И.А./



Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено подписью и печатью

2 (гла)

листов. Подпись

L. Mesch...

" 28 " 05

2014 г.

