


Фотографическое изображение

Повязка многослойная из диальдегидцеллюлозы и впитывающего нетканого материала, содержащая хитозан и протеолитический комплекс из гепатопанкреаса краба для лечения гнойно-некротических ран, трофических язв и пролежней, стерильная, «Мультнферм» по ТУ 21.20.24–001–34597908-2019, размеры 7,5 см×10 см, 10 см×10 см, 10 см×15 см, 20 см×30 см, производства АО «Мединторг», Россия

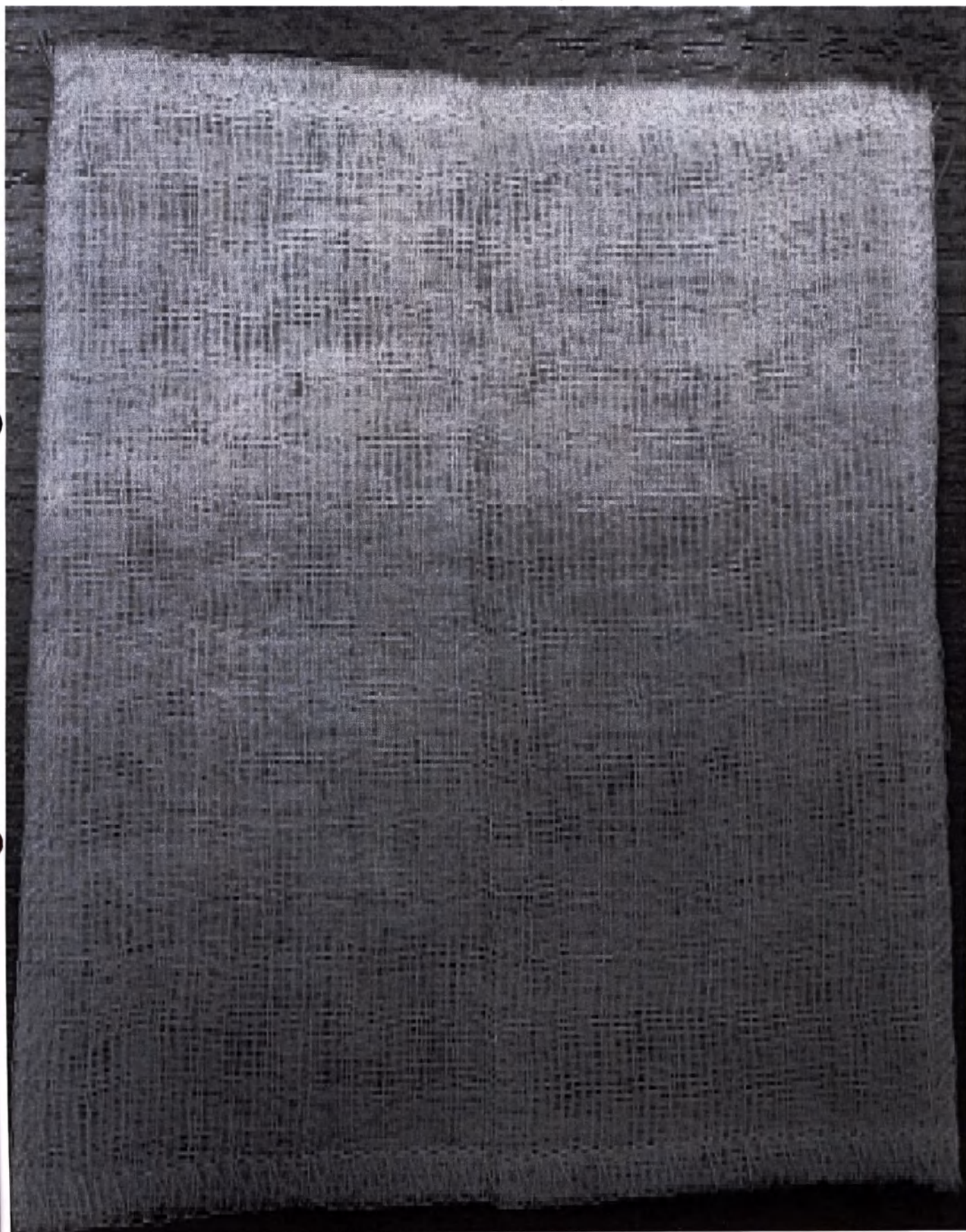

Внешний вид изделия

мультиферм

ПОВЯЗКА МНОГОСЛОЙНАЯ ИЗ ДИАЛЬДЕГИДЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ВПИТЫВАЮЩЕГО НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА, СОДЕРЖАЩАЯ ХИТОЗАН И ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИЗ ГЕПАТОПАНКРЕАСА КРАБА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ РАН, ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ И ПРОЛЕЖЕЙ

Состав: протеолитический комплекс из гепатопанкреаса краба, хитозан, диальдегидцеллюлоза

**СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
АТРАВМАТИЧНО
АПИРОГЕННО
ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 21.20.24-001-34597908-2019

STERILE R



Производитель: АО «Мединторг»
127055, г. Москва, ул. Суцеская, дом 19, стр. 5, пом. 1, офис 206
+7 (495) 921-25-15, www.medintorg.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Повязка многослойная из диальдегидцеллюлозы и впитывающего нетканого материала, содержащая хитозан и протеолитический комплекс из гепатопанкреаса краба для лечения гнойно-некротических ран, трофических язв и пролежней, стерильная, «Мультиферм» (далее повязка «Мультиферм»)

ТУ №

ТУ 21.20.24-001-34597908-2019

Описание. Многослойная повязка «Мультиферм» состоит из контактного слоя, который соединяется шовным способом с впитывающим слоем из нетканого полотна. Контактный слой (прилегающий к ране) изготавливается из полихлоридного материала – диальдегидцеллюлозы (марлевая структура), обработанной хитозаном, на которую иммобилизован протеолитический комплекс из гепатопанкреаса краба.

Механизм действия. Повязка «Мультиферм» обладает протеолитической, эластазической и коллагенолитической активностью. Протеолитическое действие обеспечивает очищение поврежденной поверхности от некротизированных тканей, эластазическая и коллагенолитическая активности протеолитического комплекса и присутствие хитозана способствуют процессам регенерации и препятствуют формированию рубца. Сроки очищения и полного заживления гнойных ран сокращаются в 1,5 – 2 раза по сравнению с традиционными методами лечения.

Назначение. Повязка «Мультиферм» рекомендуется к использованию как перевязочное средство для заживления и эпителизации длительно незаживающих ран, трофических язв, пролежней у лежачих больных, лечения трофических язв на фоне тромбофлебита, варикозного расширения вен, а также у больных сахарным диабетом.

Противопоказания и применение. Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в контактный слой повязки.

Побочные действия. Не выявлены.

Способ применения. Наружно. Перед наложением на рану контактный слой МАРЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ аккуратно смочить физиологическим раствором, раствором антисептика или контактной жидкостью контактной температуры. Наложить повязку на одну контактную сторону с МАРЛЕВОЙ СТРУКТУРОЙ. Повязку повязки наложить полностью и зафиксировать на рану марлевым бинтом или лейкопластырем. Поддерживать во влажном состоянии. Время использования от 24 до 48 часов, при необходимости допускается увеличение времени использования.

Форма выпуска. Выпускается размером 7,5х10, 10х10, 10х15, 20х30 см по 1 повязке в стерильной упаковке. Предусмотрена групповая упаковка по 5 или 10 шт. в стерильной упаковке.

Стерилизация. Радиационным методом.

Условия применения. Повязка «Мультиферм» предназначена для однократного применения при температуре от +4° до +40° С и относительной влажности воздуха не более 90%.

Условия хранения и транспортирования. Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40° С и относительной влажности воздуха не более 90%.

Срок годности: 3 года.

Партия №:

Размер:

Дата изготовления:

Количество в упаковке:

ШТРИХ-КОД


Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 3 листа(-ов)

Генеральный директор
АО «МЕДИНТОРГ»
Шаталин Д.А.



Фотографическое изображение

Повязка многослойная из диальдегидцеллюлозы и впитывающего нетканого материала, содержащая хитозан и протеолитический комплекс из гепатопанкреаса краба для лечения гнойно-некротических ран, трофических язв и пролежней, стерильная, «Мультиферм» по ТУ 21.20.24–001–34597908-2019, размеры 7,5 см×10 см, 10 см×10 см, 10 см×15 см, 20 см×30 см, производства АО «Мединторг», Россия

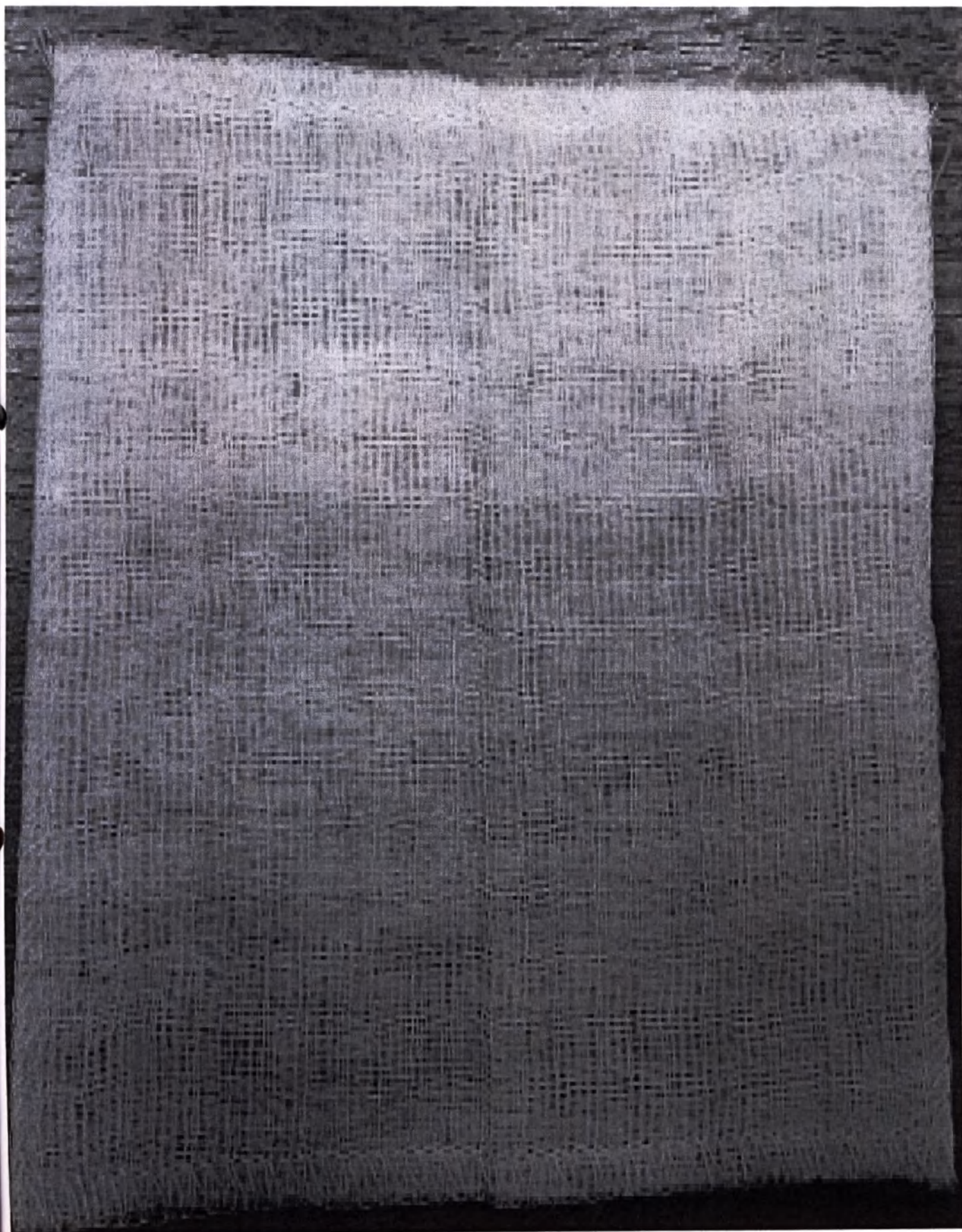

Внешний вид изделия

мультиферм


повязка многослойная из диалдегидцеллюлозы и впитывающего нетканого материала, содержащая хитозан и протеолитический комплекс из гепатопанкреаса краба для лечения гнойно-некротических ран, трофических язв и пролежней

Состав: протеолитический комплекс из гепатопанкреаса краба, хитозан, диалдегидцеллюлоза

**СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
АТРАВМАТИЧНО
ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 21.20.24-001-34597908-2019

STERILE R

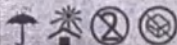

Производитель: АО «Мединторг»
127055, г. Москва, ул. Суховская, дом 19, стр. 5, пом. 1, офис 206
+7 (495) 921-25-15, www.medintorg.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Повязка многослойная из диалдегидцеллюлозы и впитывающего нетканого материала, содержащая хитозан и протеолитический комплекс из гепатопанкреаса краба для лечения гнойно-некротических ран, трофических язв и пролежней, стерильная, «Мультиферм» (далее повязка «Мультиферм»)

РУ №

ТУ 21.20.24-001-34597908-2019

Описание. Многослойная повязка «Мультиферм» состоит из контактного слоя, который соединяется шовным способом с впитывающим слоем из нетканого материала. Контактный слой (прилегающий к ране) изготавливается из полиимидного материала – диалдегидцеллюлозы (марлевой структура), обработанной хитозаном, на которую нанесен слой протеолитического комплекса из гепатопанкреаса краба.

Механизм действия. Повязка «Мультиферм» обладает протеолитической, антибактериальной и противовоспалительной активностью. Протеолитическое действие обеспечивает очищение поврежденной поверхности от инородных тел, антибактериальная и противовоспалительная активность протеолитического комплекса в присутствии хитозана способствуют процессам регенерации и препятствуют формированию рубца.

Назначение. Повязка «Мультиферм» рекомендуется к использованию как перевязочное средство для заживления и эпитализации длительно незаживающих ран, трофических язв, пролежней, у пациентов с ожогами, лечение трофических язв на фоне трофоблебитов, варикозного расширения вен, а также у больных сахарным диабетом.

Противопоказания и применение. Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в контактный слой повязки.

Побочные действия. Не выявлены.

Способ применения. Наружно. Перед наложением на рану контактный слой МАРЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ аккуратно смочить физиологическим раствором, раствором антисептика или кипяченой водой комнатной температуры. Наложить повязку на рану контактной стороной с МАРЛЕВОЙ СТРУКТУРОЙ. Повязку повязки наложить повязкой и зафиксировать на ране марлевыми бинтами или лейкопластырем. Поддерживать во влажном состоянии. Время экспозиции от 24 до 48 часов, при необходимости допускается увеличение времени экспозиции.

Форма выпуска. Выпускается размером 7,5x10, 10x10; 10x15, 20x30 см по 2 повязки в стерильной упаковке. Применяется групповая упаковка по 5 или 10 упаковок в стерильной упаковке.

Стерилизация. Радиационным методом.

Условия применения. Повязка «Мультиферм» предназначена для однократного применения при температуре от +4°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 90%.

Условия хранения и транспортирования. Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 90%.

Срок годности 3 года.

Датум MFD

Ремарк

Дата изготовления

Количество в упаковке

ШТРИХ-КОД

Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 3 листа(-ов)
Генеральный директор
АО «МЕДИНТОРГ»
Шаталин Д.А.

