

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»

А.Е. Ершов

20 19 г.

**Питательная среда для определения чувствительности микробов к антибиотикам
(среда АГВ)
по ТУ 20.59.52-074-20401675-2019**

1. Маркировка на этикетке банки:

Размер этикетки: 221x75 мм


Место для нанесения
средства идентификации

Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте. Хранить после вскрытия упаковки в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С в герметично закрытом виде. Гигроскопична. Светочувствительна. LOT С Дата изготовления Годен до Акционерное общество «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 367915, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Новый Кяхулай, ул. Декоративная, д. 89, строение 1 тел. (8722) 55-82-32	2 °С 25 °С IVD Средство идентификации ШТРИХ-КОД	ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА для определения чувствительности микробов к антибиотикам (среда АГВ) по ТУ 20.59.52-074-20401675-2019 Для профессионального применения Р № МИКРОГЕН Масса нетто г	Состав (г/л): Основа питательная для АГВ сухая 41,0 Крахмал растворимый 0,5 Динатрия фосфат обезвоженный 3,5 Способ применения: 45 г сухой питательной среды размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят 3 мин до полного расплавления агара, фильтруют через ватный фильтр, стерилизуют автоклавированием в течение 15 мин при температуре (121±2) °С. Среду после стерилизации разливают по 20 мл в стерильные чашки Петри. После застывания среду, соблюдая правила асептики, подсушивают в течение 50-60 мин при температуре (37±1) °С. Готовую среду можно использовать в течение 7 сут при температуре хранения от 2 до 8 °С. Для проведения 1000 исследований необходимо 1,2 кг сухой питательной среды
---	--	--	--

**Питательная среда для определения чувствительности микробов к антибиотикам
(среда АГВ)
по ТУ 20.59.52-074-20401675-2019**

2. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

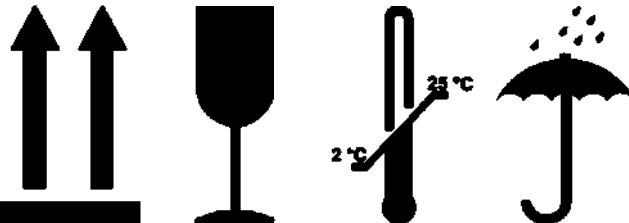 Не кантовать!	LOT Серия: Дата изготовления: Годен до: Число единиц потребит. упак. изделия:
ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА для определения чувствительности микробов к антибиотикам (среда АГВ) по ТУ 20.59.52-074-20401675-2019 	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 25 °С. Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С.	МИКРОХГЕН АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 367915, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Новый Кяхулай, ул. Декоративная, д. 89, строение 1 тел. (8722) 55-82-32
Масса брутто Масса нетто Масса нетто потребит. упак.	

Специальный знак обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза будет наноситься после прохождения установленных в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к внедрению и поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»
А.Е. Ершов
20 19 г.



ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
для определения
чувствительности
микробов к антибиотикам
(среда АГВ)
по ТУ 20.59.52-074-20401675-2019


Для профессионального применения

№ ФСР 2008/03595

МИКРОХИГ

Масса нетто

Состав (г/л)
Основной компонент
для АГВ-среды
Краситель
Диагностический
обозначение

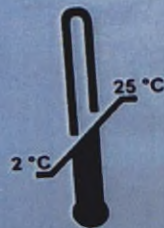

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
для определения
чувствительности
микробов к антибиотикам
по ТУ 20.59.52-074-20401675-2019

Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 25 °С. Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С.

Масса брутто 6,065 кг

Масса нетто 5 кг

Масса нетто потребит. упак. 0,250 кг



SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA



LOT Серия: *Мк 030613*

Дата изготовления: *06.2019 г.*

Годен до: *06.2021 г.*

Число единиц потребит.
упак. изделия: *20 шт*

СРЕДА
чувствительности
антибиотикам (среда АГВ)
074-20401675-2019

МИКРОХГЕН

АО «НПО «Микроген»
Россия, 115088, г. Москва,
1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87

Адрес производства:
Россия, 367915, Республика Дагестан,
г. Махачкала, п. Новый Кяхулай,
ул. Декоративная, д. 89, строение 1
тел. (8722) 55-82-32

Хранить в герметично закрытой
упаковке в сухом, защищенном
от света месте.
Хранить после вскрытия упаковки
в сухом, защищенном от света месте
при температуре от 2 до 25 °С
в герметично закрытом виде.

Гигроскопична. Светочувствительна

LOT С Мк 090619

Дата изготовления *06.2019 г.*

Годен до *06.2021 г.*

Акционерное общество «Научно-производственное
по медицинским иммунобиологическим препаратам»
АО «НПО «Микроген»
Россия, 115088, г. Москва,
1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87
Адрес производства:
Россия, 367915, Республика Дагестан, г. Махачкала,
п. Новый Кяхулай, ул. Декоративная, д. 89, строение 1
тел. (8722) 55-82-32

Начальник
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ
И МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АО «НПО «МИКРОГЕН»