

- насос может быть установлен на любой позиции в докинговой станции и при этом занимать только одну позицию в ней (в докинговой станции фирмы B Braun шприцевые насосы обязательно должны располагаться сверху, а волюметрические насосы – снизу).
- вычисление дозировки лекарства
- повышенная безопасность пациента за счет применения зажима Робсона

Описание серии «Sygamed»

- используется такой же аккумулятор, как и для инфузионного насоса от одного производителя
- буквенно-цифровые обозначения для названий лекарств.
- шприцевой насос имеет такую же философию обращения, как и волюметрические насосы (меньше обучения)
- инфузионный насос имеет такие же размеры как и шприцевой насос
- автоматическая загрузка шприца, что каждый раз правильно загружается (независимо от квалификации медсестры), и это обеспечивает правильное начало инфузии с самого начала.
- Шприц полностью закрыт.
- шприц защищен от выдергивания из корпуса насоса (при прикладывании большого усилия к внешней линии) с любой стороны
- зарядки аккумулятора хватает на 9 часов работы при скорости инфузии 5 мл/час
- максимальная скорость потока составляет 1500 мл/час для шприца объемом 50/60 мл и она автоматически уменьшается при использовании шприца меньшего объема
- библиотека на 100 наименований лекарств (буквенноцифровой дисплей)
- функция «свиного мешка» (имеется только в версии deluxe). Это функция, когда два шприца версии deluxe временно соединены через ИК-порты и при завершении работы одного шприца сразу же автоматически начинает работать второй шприц.
- запись 1500 событий
- насос может быть установлен на любой позиции в докинговой станции и при этом занимать только одну позицию в ней (в докинговой станции фирмы B Braun шприцевые насосы обязательно должны располагаться сверху, а волюметрические насосы – снизу).
- вычисление дозировки лекарства

Описание по моделям

Волюмед ® / Volumed ® µVP7000 Лайт

Волюметрический инфузионный насос для
общего медицинского применения:


Прост и надежен в обслуживании

Ручной вводы дозировки

Сокращение дозы

Понятные текстовые и аварийные сообщения

Функция устанки объема за период времени

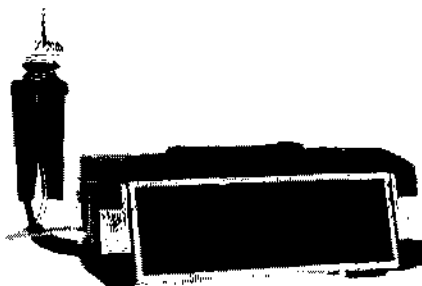

Волюмед ® / Volumed ® µVP7000 Классик (Classic)

Волюметрический инфузионный насос для
применения в области педиатрии,
неонатальной медицине, общей и



интенсивной терапии:

Функция программирования дозировки
Собственная библиотека на 50 препаратов
Экран для дополнительной информации
Функция установки объема за период времени
Ручной или регулируемый ввод дозы

Волюмед ® / Volumed ® μVP7000 Делюкс (Deluxe)

Комплектация, аналогичная Классик, с добавлением:
системный насос для применения с системой управления данными
Система распознавания ошибок дозировки



Серия Сирамед ® / Syramed® μSP6000

Могут использовать все распространенные модели шприцов, такие как: ББраун (B.Braun), БД (BD), Фрезениус (Fresenius), Терумо (Terumo), моноджект (Monoject), Шервуд (Sherwood) и т.д. размеров 5, 10, 20, 30, 50/60.

Сирамед ® / Syramed μSP6000® Лайт
Шприцевый насос для обще-медицинского применения
Простое и надежное обслуживание
Ручной ввод дозы
Понятные текстовые и аварийные сообщения


Сирамед ® / Syramed
μSP6000® Лайт (Lite)



Сирамед ® / Syramed μSP6000® Классик (Classic)

Шприцевый насос для применения в педиатрии, неонатальной медицине, общей и интенсивной терапии:
Функция программирования дозировки
Собственная библиотека на 50 медикаментов
Жидкокристаллический экран для дополнительной информации
Возможность сохранения основных параметров
Функция установки объема на определенный период времени

Сирамед ® / Syramed
μSP6000® Классик (Classic)

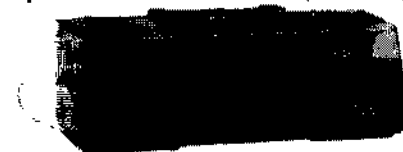

Сирамед ® / Syramed® μSP6000 Делюкс (Deluxe)

Комплектация, аналогичная Классик, с добавлением:
системный насос для применения с

