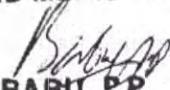


«I certify»
Vice President
Biorad Medisys Pvt. Ltd.
Babu P.P.

“Approved”
Vice President
Biorad Medisys Pvt. Ltd.
Babu P.P.
16.05.2021.

For BIORAD MEDISYS PVT. LTD.


BABU P.P.
Vice President



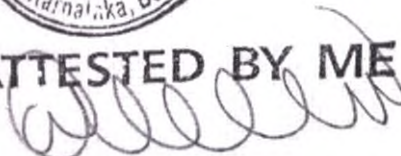
INSTRUCTION FOR USE FOR MEDICAL DEVICE
Инструкция по применению медицинского изделия

Nephrostomy catheters type «PIGTAIL» with a set for installation in variants

Катетеры нефростомические для чрескожного введения типа «Пигтейл» с набором для установки в вариантах исполнения



ATTESTED BY ME


D.K. RAMESHAPPA, M.A., LL.B
Advocate & Notary
No.23, 12th Main, 4th Block East
Jayanagar, BENGALURU - 560 011



ATTESTED
Federation of Karnataka Chambers
of Commerce & Industry


B. W. NARAYANA MURTHY
Asst. Secretary

This Attestation is made at the request of customer without any risk or
responsibility on the part of FICCI or any of its signing authorities.



Corporate Office & Manufacturing Facility:
Survey No. 48/3 & 48/7, Pashan Sus Rd, Sus Village, Taluka Mulshi,
Pune - 411021, MH, India
E: pune@bioradmedisys.com

Bangalore Office & Manufacturing Facility:
Biorad House, #660, Eshwari Industrial Estate, Hulimavu,
Bannerghatta Rd, Bangalore - 560076, KA, India
T: + 91-80-2648 0683 / 6565 8007 | F: + 91-80-2648 0684
E: biorad@bioradmedisys.com

bioradmedisys.com
Biorad Medisys Pvt. Ltd.
Registered Office:
221, Darnaj Sharnji Industrial Complex, 9 L.B.S. Marg,
Kurla (West), Mumbai - 400070, MH, India.
T: + 91-22-4263 7000 | F: + 91-22-2512 9294
E: info@bioradmedisys.com
CIN# U33111MH2000PTC265335

Нижеприведенная инструкция по применению составлена для предоставления информации в целях государственной регистрации медицинского изделия «Катетеры нефростомические типа «Пигтейл» с набором для установки в вариантах исполнения» на территории Российской Федерации.

Наименование медицинского изделия:

Катетеры нефростомические типа «Пигтейл» с набором для установки в вариантах исполнения

Производитель:

«Biorad Medisys Pvt. Ltd. (Биорад Медисис Пвт. Лтд)
221, Damji Shamji Industrial Complex, 9 L.B.S. Marg, Kurla (West), Mumbai - 400 070 Maharashtra, India

Место производства:

1. Biorad Medisys Pvt. Ltd. (Биорад Медисис Пвт. Лтд)
Biorad House, № 660, Eshwari Industrial Estate, Hulimavu Bannerghata Road, Bangalore 560076, Karnataka, India
2. Biorad Medisys Pvt Ltd. (Биорад Медисис Пвт. Лтд),
Survey No. 48/3 & 48/7 Pashan-Sus Road, Sus Village, Taluka Mulshi, Pune 411021, Maharashtra, India

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Результат-Аудит»
127572, г.Москва, ул.Абрамцевская, д.14А, Тел: 8 (495) 455-11-16, Email: 4551116@gmail.com

1. Основная информация.

Назначение:

Катетеры нефростомические типа «Пигтейл» с набором для установки в вариантах исполнения используются для временного дренажа через почку прямым проколом кожи, при дистальной непроходимости. Предназначено для чрескожного введения в почечную лоханку для нефростомического дренажа.

Информация о потребителе: изделие предназначено для использования врачами, обученными и имеющими опыт в применении диагностических и интервенционных методов, для врачей-урологов или радиологов.

Показания:

- нарушение оттока мочи
- острый гидронефроз
- постренальная анурия
- злокачественные или доброкачественные новообразования в почке и других органах мочевыделительной системы
- мочекаменная болезнь

Противопоказания:

- геморрагические гемостазиопатии (чаще всего, неконтролируемая коагулопатия).
- тяжелая гиперкалиемия, которая может быть устранена при помощи гемодиализа, до введения нефростомического катетера.
- кифосколиоз
- туберкулез почки
- выраженное ожирение
- карцинома

- постоянные перепады артериального давления

Побочные действия:

Процедура, как правило, легко переносится пациентами. В первые сутки после операции могут наблюдаться умеренные боли, небольшое количество крови в моче, которые проходят самостоятельно. Реже встречаются инфекционные осложнения, кровотечения, а также засорение, пережатие, смещение нефростомы или подтекания вокруг катетера. Наиболее редкими возможными побочными явлениями при проведении чрескожной нефростомии являются образование уриномы, перфорация внутренних органов, пневмоторакс.

Меры предосторожности при применении медицинского изделия:

- Противопоказано пациентам, которым невозможно провести катетеризацию. Не следует повторно стерилизовать изделие, надлежит использовать только в том случае, если упаковка не была повреждена. Изделие предназначено для однократного использования, сроком не более 7 дней. Повторное использование/неадекватное использование данного изделия может привести к инфицированию пациента или другим хирургическим осложнениям.
- При введении катетера должна использоваться стандартная интервенционная процедура.
- Необходимо предотвращать попадание на упакованное изделие прямых солнечных лучей. При надлежащем хранении упакованное изделие может использоваться до истечения срока годности, указанного на упаковке. Упаковку следует вскрывать только в стерильном помещении.

2. Описание.

Катетеры нефростомические типа «Пигтейл» с набором для установки в вариантах исполнения (далее по тексту - катетеры) предназначены для проведения пункционной нефростомии, которая необходима при наружном выведении мочи из почечной лоханки, а также является первым этапом при проведении биопсии чашечно-лоханочной системы почки и некоторых других операций.

Нефростомический катетер или почечная нефростома, под ультразвуковым или рентгенологическим контролем устанавливается в почку, чтобы отводить мочу из пораженного органа. Нефростома проходит сквозь кожу и мышечный слой и вводится в чашечно-лоханочный аппарат. По катетеру урина свободно выводится в мочеприемник.

Катетеры нефростомические типа «Пигтейл» с набором для установки в вариантах исполнения должны применяться в лечебных учреждениях квалифицированным персоналом.

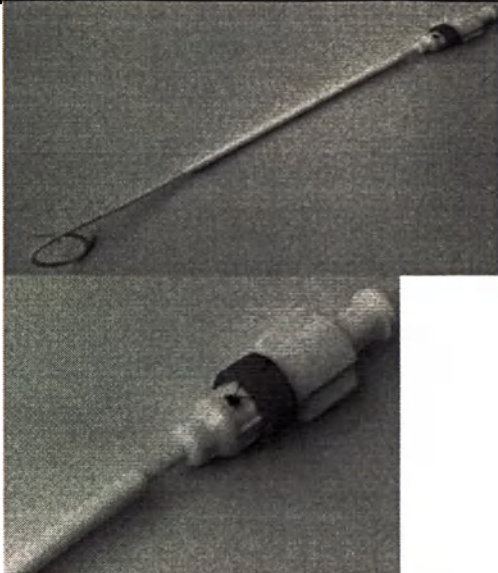
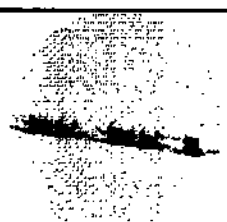
Катетер нефростомический типа «Пигтейл» сконструирован таким образом, что наконечник удерживает его и ограничивает движение. Наконечник имеет дренажные отверстия для облегчения оттока мочи.

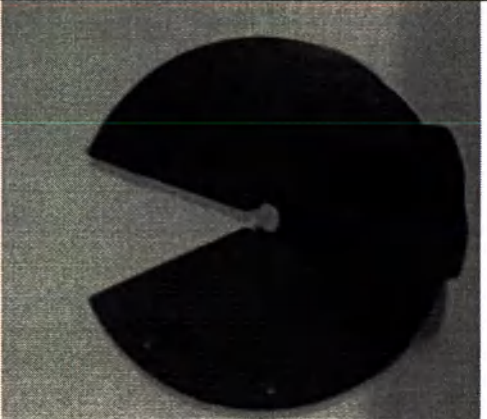
В зависимости от варианта исполнения, катетеры имеют различные дополнительные функции. С помощью иглы катетера возможно осуществить прокол через кожу в почку. Это позволяет избежать необходимости вставлять иглу и катетер отдельно. Фиксирующая нить с запорным механизмом обеспечивает дополнительную фиксацию наконечника катетера и предотвращает его смещение. Катетер нефростомический с иглой и запорным механизмом сочетает в себе обе дополнительные функции, которые перечислены выше.

Помимо самого катетера, в набор входят компоненты, необходимые для установки нефростомы. Описание возможных компонентов наборов представлены в Таблица 1 Таблице 4.

Таблица 1

Наименование компонента	Изображение	Описание
-------------------------	-------------	----------

катетер нефростомический типа «Пигтейл»		Катетер представляет собой дренажную трубку, с помощью которой происходит замена естественного способа выведения мочи из организма. Форма наконечника типа «Пигтейл» ограничивает движение катетера и удерживает его в почечной лоханке. Наконечник имеет дренажные отверстия круглой формы. Размер дренажных отверстий для облегчения оттока мочи зависит от размера катетера и от индивидуальных особенностей пациента.
катетер нефростомический типа «Пигтейл» с запорным механизмом		Трубка-выпрямитель и используется для выпрямления катетера во время процедуры введения катетера. Нефростомический катетер используется для временного дренажа путем прямого прокола через кожу в почку при дистальной обструкции. Фиксирующая нить с запорным механизмом используется для фиксации наконечника катетера, препятствует его смещению и обеспечивает его статичность, что облегчает движения пациента.
дилататор фасциальный		Дилататор фасциальный (расширитель) используется для расширения нефростомического канала до нужного размера.
коннектор для мочеприемника		Коннектор для мочеприемника представляет собой трубку, имеющую стандартное соединение типа Люэр-лок для соединения катетера с мочеприемником.
игла первичного доступа		Игла первичного доступа включает в себя стилет и две канюли, соединенных с помощью втулок. Используется для чрескожной нефростомии с целью первичного прокола и других чрескожных

		применений воо время процедуры установки катетера.
игла Чибя		Игла Чибя представляет собой пункционную иглу, состоящую из стилета и трубчатой части иглы с УЗИ-позитивным концом и метками глубины введения, режущая кромка обращена к тыльной части среза иглы, что позволяет снизить травматизм при введении. Может использоваться для процедур чрескожной нефростомии, цитологической биопсии, пункционной биопсии, для введения контрастного вещества, позволяющего оценить точность введения и внутреннее строение почки.
проводник		Проводник представляет собой жесткую струну с J-образным дистальным концом, используемую для введения и направления катетера или расширителя в желаемое анатомическое расположение во время диагностических или интервенционных процедур.
удерживающий диск		Удерживающий диск представляет собой устройство, прикрепляемое к коже пациента, которое служит для фиксации и стабилизации катетера во время эксплуатации.

скальпель		Скальпель представляет собой компактный острый инструмент, который используется для хирургических операций.
игла катетера		Игла катетера используется для прокола при проведении процедуры чрескожной нефростомии.
выпрямитель катетера		Используется для выпрямления катетера во время процедуры введения катетера. В вариантах исполнения «с иглой» поставляется в сборе с иглой катетера.

3. Инструкция по применению.

Подготовительные процедуры:

1. Пациенту сдать стандартный комплект анализов мочи, крови (биохимический анализ, посев на микрофлору, проверка времени свертываемости и уровня сахара в крови).
2. При отсутствии противопоказаний к операции проводится исследование почек с использованием таких процедур, как рентгенограмма, отсроченная пиелограмма, ретроградная пиелограмма, ультразвуковое исследование или компьютерная томография.

Основной этап:

1. Проверить правильное положение пациента: в положении лежа или слегка наклонен.
2. Определить место пункции: подвздошная область живота, на расстоянии двух пальцев латерально к боковому краю мышц спины, под двенадцатое ребро.
3. После определения места пункции, следует обработать операционное поле раствором подходящего анестетика и выполнить местную анестезию.
4. Провести пункцию иглой Чиза под контролем рентгена или ультразвука. Продвинуть иглу до достижения требуемого положения
Примечание: Прокол должен быть выполнен как можно глубже.
Примечание: Для направления прокола можно использовать ультразвук, а затем рентгеноскопию с введением контрастного вещества. Ультразвук в режиме реального времени с размещением пациента на флюороскопическом столе наиболее удобен.
5. Провести антеградную пиелограмму для визуализации цели собирающей системы, определения глубины и расширения тракта для следующих манипуляций.

Примечание: Образец мочи может быть отобран непосредственно из почечной лоханки перед инъекцией контрастного вещества, если это необходимо.

6. Извлечь стилет для дальнейшего измерения глубины системы сбора.
7. Ввести по аналогии иглу первичного доступа в почечную лоханку на измеренную глубину.
8. Ввести проводник под контролем рентгена в почечную лоханку или ниже по мочеточнику (76 мм).
9. Изъять иглу первичного доступа.
10. Расширить тракт с использованием соответствующей последовательности расширителей, проходящих через проводник, при этом следить за сохранением положения проводника с помощью рентгена.
11. Ввести по проводнику катетер нефростомический до точки, в которой наконечник «пигтейл» будет помещен в почечную лоханку, воронку или мочеточник, если это необходимо. Во избежание случайного продвижения или выведения проводника расположение его наконечника должно постоянно находиться под контролем рентгена.

Примечание: Перед введением выпрямить наконечник катетера типа «пигтейл» с помощью трубки-выпрямителя.

12. Извлечь проводник, убедившись, что конец катетера достиг нужного положения и катетер имеет надлежащее позиционирование.
13. Закрепить катетер на коже с помощью фиксирующего диска и/или фиксирующей нити, затем наложить плотную повязку.
14. Подсоединить к катетеру мочеприемник, с использованием соединителя для мочеприемника, входящего в набор, если это необходимо.
15. Контролировать после процедуры показатели, такие как кровяное давление, частота пульса и тд. Текущий режим питания может быть возобновлен, если показатели стабильны, согласно рекомендации врача.

Примечание: Процедура обычно занимает 1 час.

Продолжительность нахождения введенного катетера зависит от клинического состояния и последующего течения заболевания. Продолжительность нахождения введенного катетера не более 7 дней.

Порядок извлечения:

Процедура удаления катетера выполняется с использованием цитоскопа, обычно под местной анестезией, и захватывающих щипцов, которые захватывают и удаляют катетер.

4. Классификация

Катетеры нефростомические соответствуют Классу IIa, в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС с изменениями 2007/47ЕЕС.

5. Характеристики материалов

Материалы, из которых изготовлен каждый компонент набора для установки катетера, представлены в Таблица 2 ~~Таблице 2~~.

Таблица 2

Наименование компонента		Материал
Катетер нефростомический типа «Пигтейл»	катетер	полиуретан Tecothane TT-2095A-B40 (Lubrizol Advanced Materials, Inc.)
	коннектор катетера	нейлон Nylon-6 Natural M28RC (National Polymer Co.) с применением мастербатча белого (ALOK)
	трубка-	полиэтилен низкой плотности LDPE 24FS040

	выпрямитель	(AVH Polychem Private Limited) с применением мастербатча белого (ALOK)
Дилататор фасциальный	дилататор фасциальный	комбинированный материал: • полипропилен H100EY (Reliance Industries Limited) • этиленвинилацетат EVA TAISOX (Formosa Plastics Corporation) • сульфат бария очищенный (Finar Limited) • мастербатч серый (ALOK)
	коннектор дилататора фасциального	нейлон Nylon-6 Natural M28RC (National Polymer Co.)
Соединитель для мочеприемника	Трубка соединителя для мочеприемника	этиленвинилацетат EVA TAISOX (Formosa Plastics Corporation)
	Коннектор соединителя для мочеприемника	нейлон Nylon-6 Natural M28RC (National Polymer Co.) с применением мастербатча белого (ALOK)
	коннектор конической формы соединителя мочеприемника	этиленвинилацетат EVA TAISOX (Formosa Plastics Corporation) с применением синего пигмента (Vanvid Chemicals)
Игла первичного доступа	стиллет и канюли иглы первичного доступа	нержавеющая сталь марка 304 (Xylem Company)
	футляр иглы первичного доступа	полипропилен H100EY (Reliance Industries Limited)
	втулка иглы первичного доступа	полипропилен H100EY (Reliance Industries Limited) с применением мастербатча розового (ALOK)
Игла Чиба	стиллет и трубчатая часть иглы Чиба	нержавеющая сталь марка 304 (Xylem Company) метки глубины введения: чернила черного цвета TP300/N50 (Creganna Medical)
	футляр иглы Чиба	полипропилен H100EY (Reliance Industries Limited)
	втулка иглы Чиба	полипропилен H100EY (Reliance Industries Limited) с применением мастербатча черного (ALOK)
Проводник	проводник	нержавеющая сталь марка 304 (Xylem Company) с покрытием PTFE (SPECTRUM LABORATORY PRODUCTS INC)
	дистальный	полипропилен H100EY

	наконечник проводника	(Reliance Industries Limited) с применением мастербатча синего (ALOK)
	заглушка дистального наконечника проводника	этиленвинилацетат EVA TAISOX (Formosa Plastics Corporation)
	Е-образный зажим проводника	полипропилен H100EY (Reliance Industries Limited) с применением мастербатча синего (ALOK)
	оболочка для проводника	полипропилен H100EY (Reliance Industries Limited)
Удерживающий диск		силикон Elastosil R401/70 (Wacker Chem. Corp.)
Скальпель	лезвие скальпеля	нержавеющая сталь марка 304 (Xylem Company)
	держатель скальпеля	полипропилен H100EY (Reliance Industries Limited) с применением мастербатча голубого (ALOK)
	заглушка скальпеля	полипропилен H100EY (Reliance Industries Limited)
Игла катетера	стилет иглы катетера	нержавеющая сталь марка 304 (Xylem Company)
	втулка иглы катетера	Нейлон Nylon-6 Natural M28RC (National Polymer Co.) с применением мастербатча белого (ALOK)
	футляр иглы катетера	полипропилен H100EY (Reliance Industries Limited)
Выпрямитель	трубка	нержавеющая сталь марка 304 (Xylem Company)
	коннектор	Нейлон Nylon-6 Natural M28RC (National Polymer Co.) с применением мастербатча белого (ALOK)
Запорный механизм	коннектор	Нейлон Nylon-6 Natural M28RC (National Polymer Co.) с применением мастербатча белого (ALOK)
	колпачок коннектора	Нейлон Nylon-6 Natural M28RC (National Polymer Co.) с применением мастербатча белого (ALOK)
	концевой соединитель нити	полипропилен H100EY (Reliance Industries Limited) с применением мастербатча красного (ALOK)
Фиксирующая нить		мононить из полипропилена синего (Orion Sutures (India) Pvt.Ltd.)

Упаковка

Наименование компонента	Материал
Лоток	Аморфный полиэтилентерефталат A-PET (GM Polyplast Private Limited)
Крышка	Тайвек (Tyvek) 1073B, ПЭТ пленка марки Perfecseal SBP-2000 (DuPont)

6. Очистка и стерилизация

МИ «Катетеры нефростомические типа «Пигтейл» с набором для установки в вариантах исполнения» поставляется стерильным. Стерилизация проводится производителем самостоятельно в соответствии со стандартными и проверенными процедурами согласно EN ISO 11135-1:2007. Предложенные изделия стерилизуются до гарантированного уровня стерильности (ГУС), равного 10^{-6} , с использованием этиленоксида (ЭО) в соответствии с разработанными руководствами. Катетеры обрабатываются в соответствии с валидированными циклами стерилизации. Все валидационные отчеты по стерилизации хранятся в отделе технического обслуживания.

Материал Тайвек, используемый для упаковки, позволяет максимально сохранить стерильность при использовании этиленоксида.

Испытание на стерильность изделия и испытание биологических индикаторов показали, что больше выживших организмов обнаружено в анализе биологических индикаторов, а бионагрузка изделия очень низка, если сравнивать с показателем количества спор биологического индикатора ($3,3 \times 10^6$ КОЭ). Следовательно, если значение уровня гарантированной стерильности для испытуемых образцов больше, чем показатель количества спор биологических индикаторов, это означает, что существует более высокая уверенность в стерильности, что обеспечивает меньшую вероятность выжившего организма в популяции единиц изделия.

Испытание по определению антимикробной активности подтверждает, что испытуемые образцы не обладают антимикробными свойствами. Следовательно, испытание на стерильность не требует каких-либо дополнительных изменений.

Общий средний показатель бионагрузки для всех изделий находится в допустимых пределах. При этом, нагрузка бионагрузки на этом изделии очень низка при сравнении числа спор биологического индикатора ($3,3 \times 10^6$ КОЭ).

Испытание на остаточный этиленоксид согласно EN ISO 10993- 7:2008 соответствовало критериям приемлемости.

7. Действующие стандарты

1	ISO 9001	Quality management system – Requirements / Системы управления качеством– Требования
2	EN ISO 13485	Quality system –Medical Devices– Requirements for the Regulatory Purposes / Системы управления качеством – Медицинские изделия – Требования для целей регулирования
3	93/42/EEC amendment directive 2007/47/EC	European Council Directive / Директива Европейского Совета
4	BS EN 1617	Sterile drainage catheters and accessory devices for single Use / Стерильные дренажные катетеры и принадлежности одноразового использования
5	BS EN 1617	Sterile drainage catheters and accessory devices for single Use / Стерильные дренажные катетеры и вспомогательные устройства одноразового использования
6	BS EN 1618	Catheters other than intravascular catheters / Катетеры, кроме внутрисосудистых катетеров
7	EN ISO 11607-1	Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and

		packaging systems / Упаковка медицинских изделий, подлежащих конечной стерилизации. Часть 1: Требования к материалам, барьерным системам стерилизации и системам упаковки
8	EN ISO 11607-2	Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes / Упаковка медицинских изделий, подлежащих конечной стерилизации. Часть 2: Требования к оценке процессов формования, герметизации и сборки
9	EN ISO 14971	Medical devices - Application of risk management to medical devices / Медицинские изделия – Применение управления рисками к медицинским изделиям
10	EN ISO 10993- 1	Biological evaluation of medical devices: Part 1: Evaluation and testing within a risk management process / Биологическая оценка медицинских изделий: Часть 1: Оценка и исследования в рамках процесса управления рисками
11	EN ISO 10993- 5	Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity / Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 5: Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
12	EN ISO 10993- 7	Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals / Биологическая оценка медицинских изделий –Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации
13	ISO 10993-10	Biological evaluation of medical devices -- Part 10: Tests for irritation and skin sensitization / Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 10: Пробы на раздражение и аллергическую реакцию замедленного типа
14	EN ISO 10993-11	Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials / Биологическая оценка медицинских изделий –Часть 12: Приготовление проб и контрольные образцы
15	EN ISO 11135-1	Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices / Стерилизация изделий медицинского назначения–Этиленоксид – Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
16	ISO 11135-2	Sterilization of health care products — Ethylene oxide— Part 2: Guidance on the application of ISO 11135-1 / Стерилизация изделий медицинского назначения–Этиленоксид – Часть 2: Рекомендации по применению стандарта ISO 11135-1
17	EN 980	Symbols for use in the labelling of medical devices / Символы для использования при маркировке медицинских изделий
18	ISO 15223-1	Medical devices -- Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied -- Part 1: General requirements / Изделия медицинские – Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации – Часть 1: Общие требования
19	ISO 594-1	Conical fittings with a 6% (luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment - Part 1: General

		Requirements / Детали соединительные с конусностью 6 % (Люэра) для шприцев, игл и другого медицинского оборудования– Часть 1: Общие требования
20	ISO 594-2	Conical fittings with a 6% (luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment - Part 2: Lock Fittings / Детали соединительные с конусностью 6 % (Люэра) для шприцев, игл и другого медицинского оборудования– Часть 2: Часть 2: Люэровские наконечники
21	ISO 14644-1	Clean rooms and associated controlled environments — Part 1: Classification of air cleanliness / Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды– Часть 1: Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц
22	ISO 14644-2	Clean rooms and associated controlled environments — Part 2: Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1 / Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды–Часть 2: Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия стандарту ISO14644-1
23	EN ISO 11737-1	Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products / Стерилизация медицинских изделий– Микробиологические методы – Часть 1: Оценка популяции микроорганизмов на изделиях
24	EN 556-1	Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices / Стерилизация медицинских изделий – Требования к медицинским изделиям категории «СТЕРИЛЬНЫЕ»– Часть 1: Требования к конечной стерилизации медицинских изделий
25	EN 1041	Information supplied by the manufacturer of medical devices / Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий

8. Технические характеристики

Катетер нефростомический типа «Пигтейл»

Характеристика		Значение									
Наружный диаметр катетера	Fg	6,0	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0
	мм	2,00± 0,10	2,33± 0,10	2,67± 0,10	2,83± 0,10	3,00± 0,10	3,33± 0,10	4,00± 0,10	4,67± 0,10	5,33± 0,10	6,00± 0,10
Внутренний диаметр катетера, мм		1,22± 0,10	1,32± 0,10	1,44± 0,10	1,47± 0,10	1,62± 0,10	1,65± 0,10	1,95± 0,10	2,45± 0,10	3,00± 0,10	3,18± 0,10
Диаметр отверстий катетера, мм		0,80± 0,10	0,80± 0,10	1,15± 0,10	1,15± 0,10	1,25± 0,10	1,25± 0,10	1,60± 0,10	1,60± 0,10	1,95± 0,10	1,95± 0,10
Длина конусного сужения, мм		Не менее 9 мм									
Расстояние между отверстиями, мм		Не менее 10 мм									
Рабочая длина, мм		220 ± 5 250 ± 5 300 ± 5 350 ± 5 400 ± 5									
Масса, г		2,95 ± 0,5	3,10 ± 0,5	3,35 ± 0,5	3,50 ± 0,5	3,70 ± 0,5	4,00 ± 0,5	5,70± 0,5	7,50± 0,5	9,40± 0,5	11,50± 0,5
		3,10± 0,5	3,35± 0,5	3,60± 0,5	3,75± 0,5	3,90± 0,5	4,20± 0,5	6,20± 0,5	8,20± 0,5	10,25± 0,5	12,35± 0,5
		3,50± 0,5	3,80± 0,5	4,10± 0,5	4,25± 0,5	4,40± 0,5	4,70± 0,5	6,85± 0,5	9,05± 0,5	11,25± 0,5	13,40± 0,5
		3,90± 0,5	4,20± 0,5	4,50± 0,5	4,65± 0,5	4,85± 0,5	5,25± 0,5	7,50± 0,5	9,80± 0,5	12,10± 0,5	14,50± 0,5
		4,30± 0,5	4,65± 0,5	5,05± 0,5	5,20± 0,5	5,40± 0,5	5,80± 0,5	8,10± 0,5	10,50± 0,5	13,00± 0,5	15,65± 0,5
Параметры фиксирующего		Время возврата кончика завитка к стержню не более 30 секунд после полного распрямления катетера,									
		Ø17мм ±	Ø 17мм ±	Ø 17мм ±	Ø 19мм ±	Ø 19мм ±	Ø 19мм ±	Ø 22мм ±	Ø 24мм ±	Ø 26мм ±	Ø 26мм ±

завитка	0,25мм	0,25мм	0,25мм	0,25мм	0,25мм	0,25мм	0,25мм	0,25мм	0,25мм	0,25мм
Количество отверстий в наконечнике	4									
Твердость катетера по Шору	95 A ± 5 A									
Рентгеноконтрастность	Катетер должен просматриваться при рентгеноскопии									
Прочность на разрыв катетера	Не менее 12 Н									
Прочность на разрыв соединения «катетер-коннектор Типа Люэр-лок»	Не менее 15 Н									
Поверхность	На внешней поверхности не должно быть технологических и поверхностных дефектов, Данная поверхность должна быть минимально травматичной во время использования,									
Утечка в месте соединения Типа Люэр-лок	Отсутствие утечки									
Скорость тока жидкости, мл/мин	Не менее 50	Не менее 70	Не менее 90	Не менее 100	Не менее 115	Не менее 140	Не менее 200	Не менее 270	Не менее 355	Не менее 450
Безопасность магнитно-резонансной томографии (МРТ)	Катетер не должен препятствовать проведению МРТ,									

Внешний диаметр коннектора Типа Люэр-лок	7,6 мм ± 0,5 мм									
Диаметр большого основания внутреннего конуса, мм	4,25± 0,10 мм									
Конусность коннектора типа Люэр-лок	6%									
Длина трубки-выпрямителя, мм	100 мм ± 1 мм									
Диаметр трубки-выпрямителя внешний, мм	4,00 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10	4,80 ± 0,10	5,00 ± 0,10	5,80 ± 0,10	6,40 ± 0,10	7,00 ± 0,10	7,80 ± 0,10

Запорный механизм

Габаритные размеры (Длина x Ширина), мм (± 0,10 мм)	34,50 X 13,70									
Внешний диаметр коннектора Типа Люэр-лок	7,6 мм ± 0,3 мм									
Диаметр большого основания внутреннего конуса коннектора Типа Люэр-лок	4,25± 0,10 мм									
Конусность	6%									

коннектора типа Люэр-лок	
Габаритные размеры концевого соединителя нити, мм (± 0.10 мм)	4,90 X 11,00
Диаметр отверстия для крепления фиксирующей нити, мм	$0,70 \pm 0,10$

Фиксирующая нить

Длина номинальная	800 мм $\pm$ 5 мм
Длина фактическая	Не менее 98% от номинальной
Диаметр	$0,19 \text{ мм} \pm 0,02 \text{ мм}$
Структура	Мононить
Цвет	Синий
Прочность на разрыв в простом узле	Не менее 5 Н

Игла катетера

Диаметр, мм	$1,00 \pm 0,01$	$1,00 \pm 0,01$	$1,00 \pm 0,01$	$1,00 \pm 0,01$	$1,20 \pm 0,01$	$1,20 \pm 0,01$	$1,20 \pm 0,01$	$1,60 \pm 0,01$	$1,60 \pm 0,01$	$1,60 \pm 0,01$
Длина, см	$27,5 \text{ см} \pm 0,5 \text{ см}$ $30,5 \text{ см} \pm 0,5 \text{ см}$ $35,5 \text{ см} \pm 0,5 \text{ см}$ $35,5 \text{ см} \pm 0,5 \text{ см}$ $35,5 \text{ см} \pm 0,5 \text{ см}$									
Длина кончика стилета, мм	$3 \text{ мм} \pm 1 \text{ мм}$									
Форма кончика	Стилет имеет трехгранный кончик для нетравматичного размещения иглы									

иглы										
Масса, г	$3,5 \pm 0,5$	$3,5 \pm 0,5$	$3,5 \pm 0,5$	$3,5 \pm 0,5$	$3,7 \pm 0,5$	$3,7 \pm 0,5$	$3,7 \pm 0,5$	$4,0 \pm 0,5$	$4,0 \pm 0,5$	$4,0 \pm 0,5$
	$3,7 \pm 0,5$	$3,7 \pm 0,5$	$3,7 \pm 0,5$	$3,7 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$4,2 \pm 0,5$	$4,2 \pm 0,5$	$4,2 \pm 0,5$
	$3,9 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$4,1 \pm 0,5$	$4,1 \pm 0,5$	$4,1 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,5$
	$3,9 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$4,1 \pm 0,5$	$4,1 \pm 0,5$	$4,1 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,5$
	$3,9 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$3,9 \pm 0,5$	$4,1 \pm 0,5$	$4,1 \pm 0,5$	$4,1 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,5$
Поверхность	При осуществлении визуальной проверки на внешней поверхности рабочей длины устройства отсутствуют посторонние вещества или поверхностные дефекты. На острие иглы нет выступов, наростов, крючков и т.п.									
Твердость по Роквеллу	28-30 HRC									
Прочность на разрыв соединения стилет-штулка	Не менее 15 Н									
Внешний диаметр коннектора Типа Люэр-лок	$7,6 \text{ мм} \pm 0,5 \text{ мм}$									
Диаметр большого основания внутреннего конуса, мм	$4,25 \pm 0,10 \text{ мм}$									
Конусность коннектора типа Люэр-лок	6%									
Внутренний диаметр коннектора Типа Люэр-лок	$8,0 \text{ мм} \pm 0,3 \text{ мм}$									
Диаметр малого основания наружного конуса коннектора Типа Люэр-лок	$4,00 \pm 0,10 \text{ мм}$									

Совместимость с катетером помощью соединения Люэр-лок	с с Должен быть соединен с помощью соединения типа Люер-лок
Материал инструмента	Нержавеющая сталь 304

Выпрямитель

Номинальный наружный диаметр, мм	1,20	1,20	1,20	1,20	1,60	1,60	1,60	2,10	2,10	2,10
Наружный диаметр, мм	1,21 ± 0,01	1,27 ± 0,01	1,27 ± 0,01	1,27 ± 0,01	1,61 ± 0,01	1,61 ± 0,01	1,61 ± 0,01	2,10 ± 0,01	2,10 ± 0,01	2,10 ± 0,01
Внутренний диаметр, мм	1,01 ± 0,01	1,03 ± 0,01	1,03 ± 0,01	1,03 ± 0,01	1,21 ± 0,01	1,21 ± 0,01	1,21 ± 0,01	1,61 ± 0,01	1,61 ± 0,01	1,61 ± 0,01
Длина, см	25,0 см ± 0,5 см 28,0 см ± 0,5 см 33,0 см ± 0,5 см 33,0 см ± 0,5 см 33,0 см ± 0,5 см									
Масса, г	4,1 ± 0,5 4,5 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,7 ± 0,5	4,1 ± 0,5 4,5 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,7 ± 0,5	4,1 ± 0,5 4,5 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,7 ± 0,5	4,1 ± 0,5 4,5 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,7 ± 0,5	4,3 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,9 ± 0,5 4,9 ± 0,5 4,9 ± 0,5	4,3 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,9 ± 0,5 4,9 ± 0,5 4,9 ± 0,5	4,3 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,9 ± 0,5 4,9 ± 0,5 4,9 ± 0,5	4,5 ± 0,5 4,9 ± 0,5 5,1 ± 0,5 5,1 ± 0,5 5,1 ± 0,5	4,5 ± 0,5 4,9 ± 0,5 5,1 ± 0,5 5,1 ± 0,5 5,1 ± 0,5	4,5 ± 0,5 4,9 ± 0,5 5,1 ± 0,5 5,1 ± 0,5 5,1 ± 0,5
Поверхность	При осуществлении визуальной проверки на внешней поверхности рабочей длины устройства отсутствуют посторонние вещества или поверхностные дефекты. На острие иглы нет выступов, наростов, крючков и т.п.									
Твердость по Роквеллу	28-30 HRC									

Прочность на разрыв соединения стержень-штулка	Не менее 15 Н
Внешний диаметр коннектора Типа Люэр-лок	7,6 мм ± 0,5 мм
Диаметр большого основания внутреннего конуса, мм	4,25 ± 0,10 мм
Конусность коннектора типа Люэр-лок	6%
Внутренний диаметр коннектора Типа Люэр-лок	8,0 мм ± 0,3 мм
Диаметр малого основания наружного конуса коннектора Типа Люэр-лок	4,00 ± 0,10 мм
Совместимость с катетером с помощью соединения типа Люэр-лок	Должен быть соединен с помощью соединения типа Люер-лок
Материал	Нержавеющая сталь 304

инструмента	
-------------	--

Дилататор фасциальный

Наружный диаметр	Fr	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
	мм	2,00 ± 0,10	2,33 ± 0,10	2,67 ± 0,10	3,00 ± 0,10	3,33 ± 0,10	4,00 ± 0,10	4,67 ± 0,10	5,33 ± 0,10	6,00 ± 0,10	6,67 ± 0,10
Внутренний диаметр, мм		1,15 ± 0,10	1,24 ± 0,10	1,32 ± 0,10	1,42 ± 0,10	1,52 ± 0,10	1,92 ± 0,10	2,45 ± 0,10	3,00 ± 0,10	3,10 ± 0,10	3,25 ± 0,10
Длина, мм		220 ± 5									
Масса, г		1,40 ± 0,5	1,70 ± 0,5	2,05 ± 0,5	2,40 ± 0,5	2,75 ± 0,5	3,30 ± 0,5	4,40 ± 0,5	5,60 ± 0,5	6,95 ± 0,5	9,60 ± 0,5
Прочность на разрыв		Не менее 14 Н									
Длина конусного сужения		Не менее 10 мм									
Совместимость с проводником 0,038 дюйма (0,96 мм)		Через дилататор должен проходить проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96 мм)									
Форма дистального конца		Наличие конусного сужения, отшлифованного края. Край не должен быть острым. Без трещин, царапин.									
Рентгеноконтрастность		Дилататор должен просматриваться при рентгеноскопии									
Прочность на разрыв соединения «дилататор – коннектор»		Не менее 15 Н									
Внешний диаметр коннектора Типа Люэр-лок		7,6 мм ± 0,5 мм									
Диаметр большого основания внутреннего конуса, мм		4,25 ± 0,10 мм									

Конусность коннектора типа Люэр-лок	6%
---	----

Соединитель для мочеприемника

Наружный диаметр трубки, мм	4,70 ± 0,1
Внутренний диаметр трубки, мм	3,20 ± 0,1
Длина трубки, мм	195 ± 1
Длина общая, мм	250 ± 1
Масса	5,5 г ± 0,5 г
Прочность на разрыв	Не менее 70 Н
Внутренний диаметр коннектора Типа Люэр-лок	8,0 мм ± 0,3 мм
Диаметр малого основания наружного конуса коннектора Типа Люэр-лок	4,00 ± 0,10 мм
Конусность коннектора типа Люэр-лок	6%
Совместимость с катетером с помощью соединения Типа Люэр-лок	Должен быть соединен с помощью соединения Люер-типа
Утечка в месте соединения Типа Люэр-лок	Отсутствие утечки

Игла первичного доступа

Наружный диаметр внешней канюли	1,25 мм ± 0,01 мм
Внутренний диаметр внешней канюли	0,95 мм ± 0,01 мм
Длина внешней канюли	200 мм ± 1,0 мм
Наружный диаметр внутренней канюли	0,9 мм ± 0,01 мм
Внутренний диаметр внутренней канюли	0,65 мм ± 0,01 мм
Длина внутренней канюли	220 мм ± 1,0 мм
Диаметр стилета	0,6 мм ± 0,01 мм
Длина стилета	245 мм ± 1,0 мм
Выступающая часть кончика иглы	Стилет имеет трехгранный кончик для нетравматичного размещения иглы. В собранной конструкции трехгранный кончик стилета должен выступать за пределы канюли.
Допустимый угол отклонения канюли без нарушения целостности	20° ± 1°
Твердость по Роквеллу	52-54 HRC
Масса	3,65 г ± 0,5 г
Прочность на разрыв соединения канюля-штулка	Не менее 15 Н
Прочность на разрыв соединения стилет-штулка	Не менее 15 Н
Поверхность	При осуществлении визуальной проверки на внешней поверхности рабочей длины устройства отсутствуют посторонние вещества или поверхностные дефекты.

	На острие иглы нет выступов, наростов, крючков и т.п.
Совместимость проводника	Один проводник диаметром 0,038 дюймов (0,96 мм)
Материал инструмента	Нержавеющая сталь 304

Игла Чиба

Диаметр стилета	0,44 мм ± 0,01 мм
Длина стилета	220 мм ± 0,5 мм
Прочность на разрыв конструкции «стилет-втулка» (прочность крепления)	Не менее 15 Н
Наружный диаметр трубчатой части иглы	0,71 мм ± 0,01 мм
Внутренний диаметр трубчатой части иглы	0,46 мм ± 0,01 мм
Длина трубчатой части иглы	200 мм ± 0,5 мм
Прочность на разрыв конструкции «трубчатая часть иглы-втулка»	Не менее 15 Н
Масса	1,85 г ± 0,5 г
Твердость по Роквеллу	52-54 HRC
Поверхность	При осуществлении визуальной проверки на внешней поверхности рабочей длины устройства отсутствуют посторонние вещества или поверхностные дефекты. На острие иглы нет выступов, наростов, крючков и т.п.
Форма острия иглы	Трубчатая часть иглы заострена для нетравматичного размещения устройства, срез Чиба (режущая кромка обращена к тыльной части среза иглы). В собранной конструкции трубчатая часть иглы не выходит за пределы стилета, либо ее длина не превышает длину стилета более чем на 2 мм.
Угол заточки острия иглы	$22^{\circ} \pm 1^{\circ}$
Допустимый угол отклонения канюли, без нарушения целостности	$20^{\circ} \pm 1^{\circ}$
Расстояние между метками маркировки иглы Чиба	10 ± 0,1 мм
Количество меток маркировки иглы Чиба	19
Материал инструмента	Нержавеющая сталь 304

Проводник

Диаметр проводника	0,96мм ± 0,02 мм (0,038 ± 0,0008 дюйма)
Длина проводника	1500 мм ± 125 мм
Масса	Не более 6,5 г
Радиус дистального наконечника	3 мм ± 1 мм

Смазывающая способность покрытия стержня	Коэффициент трения должен быть не более 0,386
Прочность на разрыв проводника	Не менее 10 Н
Поверхность	При осуществлении визуальной проверки на внешней поверхности рабочей длины устройства отсутствуют посторонние вещества или поверхностные дефекты.
Допустимый угол отклонения, без нарушения целостности	$90^{\circ} \pm 1^{\circ}$
Устойчивость к коррозии	При осуществлении визуальной проверки не должно быть признаков коррозии

Удерживающий диск

Диаметр, мм	$38,5 \pm 0,5$
Масса, г	$5,0 \pm 1,0$
Количество отверстий для швов	6
Диаметр отверстий для швов, мм	$1,27 \pm 0,10$
Поверхность	При осуществлении визуальной проверки на внешней поверхности устройства отсутствуют посторонние вещества или поверхностные дефекты

Скальпель

Длина изделия	$69 \text{ мм} \pm 0,25 \text{ мм}$
Длина лезвия	$23 \text{ мм} \pm 0,25 \text{ мм}$
Ширина режущей кромки лезвия	Не более 0,004 мм
Угол заточки лезвия	$16^{\circ} \pm 1^{\circ}$
Прочность на излом лезвия	Не менее 15 Н
Твердость по Роквеллу	52-54 HRC
Шероховатость	Не более 0,31 мкм
Правильность соединения лезвия с держателем	Отсутствие дефектов соединения
Материал инструмента	Нержавеющая сталь 304

Упаковка

Ширина упаковки, мм	200 ± 5
Длина упаковки, мм	410 ± 5
Ширина клевого слоя, мм	$10 \pm 0,5$
Прочность клевого слоя на разрыв	$\geq 2,5 \text{ Н}$

Коробка (внешняя упаковка)

Размер, мм (± 1)	410X200X28
Толщина материала коробки, мм	$0,5 \text{ мм} \pm 0,1 \text{ мм}$

9. Маркировка

Маркировка выполнена в соответствии с BS EN 980:2008, EN ISO 15223-1:2012.

Описание символов маркировки:

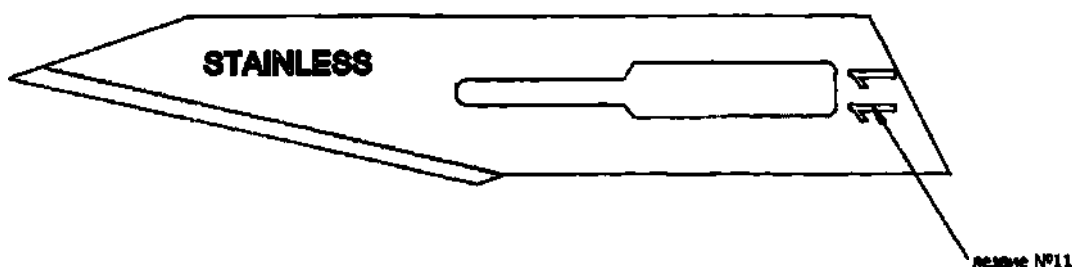
Таблица 21

Логотип	Значение
	Код партии
Product Code	Номер изделия по каталогу
	Изделие соответствует требованиям Директивы ЕС 93/42/ЕЕС
	Срок годности
	Данные о производителе
	Дата производства
	Следуйте инструкции по применению
	Диапазон температур
	Только для одноразового использования. Не использовать повторно
	Беречь от влаги
	Не используйте в случае повреждения упаковки
	Не подлежит повторной стерилизации
	Не допускать воздействия солнечного света
	Стерилизовано этиленоксидом
	Официальный представитель ЕС
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Этой стороной вверх

Данные изделия стерильны и нетоксичны.

На лезвии скальпеля присутствует маркировка «Stainless», обозначающая материал изготовления – нержавеющая сталь. Также на лезвии скальпеля присутствует маркировка «11», соответствующая установленному производителем типоразмеру лезвия №11. Маркировка типоразмера на лезвиях скальпелей является внутренним требованием

Производителя и не регулируется национальными и международными стандартами.



10. Упаковка

МИ «Катетеры нефростомические типа «Пигтейл» с набором для установки в вариантах исполнения» упаковано в лоток с крышкой из Тайвека.

Лоток с крышкой совместно с Инструкцией по применению помещают во внешнюю упаковку (коробку), которая обеспечивает достаточную защиту содержимого.

11. Условия транспортировки и хранения

Картонная коробка для транспортировки изготовлена из толстого картона, обладающего высокой прочностью и амортизирующими свойствами, транспортирование возможно любыми видами транспорта, при соблюдении температурного режима и относительной влажности воздуха.

Хранение с соблюдением следующих условий:

- температура в помещении: от +23 °C до +33 °C;
- относительная влажность: от 30% до 80%.

Транспортировка с соблюдением следующих условий:

- температура в помещении: от -29 °C до +60 °C;
- относительная влажность: от 30% до 80%.

Эксплуатация с соблюдением следующих условий:

- температура в помещении: от +23 °C до +33 °C;
- относительная влажность: от 30% до 80%.

12. Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

Изделие и упаковку следует утилизировать безопасным и надлежащим образом после использования, в соответствии с правилами по управлению биомедицинскими отходами.

Согласно классификации медицинских отходов, медицинское изделие «Катетер нефростомический типа «Пигтейл» с набором для установки, в вариантах исполнения» относится к классу Б в соответствии с СанПин 2.1.3684-21. Утилизация производится в соответствии с действующим местным законодательством. Запрещается утилизация загрязненного изделия как бытовых отходов. При утилизации загрязненных частей используйте перчатки.

13. Срок годности

Срок годности изделий: 3 года.

14. Ремонт и техническое обслуживание

Данное медицинское изделие не подлежит ремонту.

Техническое обслуживание не требуется.

15. Гарантийные обязательства

Компания «Biorad Medisys Pvt. Ltd.» гарантирует, что при разработке и производстве данных изделий были соблюдены разумные меры предосторожности. Хранение, а также другие факторы, имеющие отношение к пациенту, диагностике, лечению, хирургическим процедурам и другим вопросам, находящимся вне контроля компании, оказывают непосредственное влияние на изделие и результаты, получаемые при его использовании. Компания не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия.

Гарантийный срок годности равен сроку годности и составляет 36 месяцев (3 года).

16. Рекламации

По вопросам эксплуатации медицинского изделия, нежелательных явлениях, выявленных при применении обращаться к производителю по адресу:

Biorad Medisys Pvt. Ltd. (Биорад Медисис Пвт. Лтд.)

221, Damji Shamji Industrial Complex, 9 L.B.S. Marg, Kurla (West), Mumbai - 400 070
Maharashtra, India

Адрес электронной почты: babu@bioradmedisys.com

Катетеры нефростомические типа «Пигтейл» с набором для установки в вариантах исполнения:

1. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» с набором для установки:

1.1. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 22 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.2. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 25 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.3. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 30 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.4. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 35 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.

- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.5. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 40 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.6. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 22 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.7. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 25 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.8. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 30 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.

- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.9. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 35 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.10. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 40 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.11. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 22 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.12. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 25 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 25 см – 1 шт.

- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.13. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 30 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.14. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 35 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.15. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 40 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.16. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 22 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.17. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 25 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.18. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 30 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.19. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 35 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.20. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 40 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.21. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 22 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.22. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 25 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.23. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 30 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.24. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 35 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.25. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 40 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.26. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 22 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.27. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 25 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

1.28. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 30 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.29. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 35 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.30. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 40 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.31. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 22 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.

- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.32. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 25 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.33. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 30 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.34. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 35 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.35. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 40 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.

- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.36. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 22 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.37. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 25 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.38. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 30 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.39. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 35 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.

- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.40. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 40 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.41. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 22 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.42. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 25 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.43. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 30 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.

- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.44. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 35 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.45. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 40 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.46. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 22 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.47. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 25 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.

- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.48. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 30 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.49. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 35 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

1.50. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 40 см, с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» с запорным механизмом с набором для установки:

2.1. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.

- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.2. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.3. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.4. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.

- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.5. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.6. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.7. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.8. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.9. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.10. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.11. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.

- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.12. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.13. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.14. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.15. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.16. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.17. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.18. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.

- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.19. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.20. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.21. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

2.22. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.23. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.24. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.25. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.

- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.26. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.27. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.28. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.

- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.29. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.30. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.31. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.32. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.33. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.34. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.35. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.

- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.36. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.37. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.38. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.39. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.40. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.41. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.42. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.

- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.43. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.44. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.45. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

2.46. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.47. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.48. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.49. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.

- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2.50. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» с иглой с набором для установки:

3.1. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 22 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.2. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 25 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.

- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.3. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 30 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.4. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 35 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.5. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 40 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.6. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 22 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.7. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 25 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.8. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 30 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.9. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 35 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.

- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.10. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 40 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.11. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 22 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.12. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 25 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.13. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 30 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.14. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 35 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.15. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 40 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.16. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 22 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.

- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.17. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 25 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.18. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 30 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.19. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 35 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

3.20. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 40 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.21. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 22 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.22. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 25 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.23. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 30 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.

- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.24. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 35 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.25. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 40 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.26. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 22 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.

- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.27. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 25 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.28. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 30 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.29. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 35 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.30. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 40 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 40 см – 1 шт.

- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.31. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 22 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.32. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 25 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.33. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 30 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.

- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.34. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 35 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.35. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 40 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.36. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 22 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника– 1 шт.
- удерживающий диск– 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.37. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 25 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.38. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 30 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.39. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 35 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.40. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 40 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.

- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.41. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 22 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.42. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 25 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.43. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 30 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

3.44. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 35 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.45. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 40 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.46. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 22 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 22 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.47. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 25 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 25 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.

- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.48. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 30 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 30 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.49. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 35 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 35 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3.50. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 40 см, с иглой с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 40 см – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.

- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

4.1. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 22 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.2. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 25 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.3. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 30 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

4.4. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 35 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.5. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 40 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 6 Fr (2,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.6. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 22 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.7. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 25 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.8. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 30 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.9. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 35 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.10. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 40 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.

- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 6 Fr (2,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.11. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 22 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.12. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 25 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.13. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 30 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.

- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.14. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 35 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.15. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 40 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8 Fr (2,67 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 7 Fr (2,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.16. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 22 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.

- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.17. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 25 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.18. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 30 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.19. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 35 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.20. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 40 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 8.5 Fr (2,83 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,00 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,20 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.21. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 22 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.22. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 25 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.23. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 30 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.

- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.24. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 35 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.25. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 40 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 9 Fr (3,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 8 Fr (2,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.26. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 22 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.

- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.27. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 25 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.28. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 30 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.29. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 35 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.

- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.30. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 40 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 10 Fr (3,33 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 9 Fr (3,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.31. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 22 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.32. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 25 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.33. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 30 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.34. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 35 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.35. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 40 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 12 Fr (4,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,20 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 1,60 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 10 Fr (3,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.36. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 22 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.37. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 25 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.38. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 30 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чибя – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.39. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 35 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.

- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.40. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 40 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 14 Fr (4,67 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 12 Fr (4,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.41. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 22 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.42. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 25 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.

- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.43. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 30 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.44. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 35 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.45. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 40 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 16 Fr (5,33 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 14 Fr (4,67 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.

- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.46. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 22 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 22 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 27,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 25,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.47. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 25 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 25 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 30,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 28,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.48. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 30 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 30 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.49. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 35 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 35 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

4.50. Катетер нефростомический типа «Пигтейл» диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 40 см, с иглой и запорным механизмом с набором для установки:

- катетер нефростомический типа «Пигтейл»: диаметром 18 Fr (6,00 мм), длиной 40 см, с запорным механизмом и фиксирующей нитью – 1 шт.
- игла катетера: диаметром 1,60 мм, длиной 35,5 см – 1 шт.
- выпрямитель: диаметром 2,10 мм, длиной 33,0 см – 1 шт.
- проводник диаметром 0,038 дюйма (0,96мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 16 Fr (5,33 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 18 Fr (6,00 мм) – 1 шт.
- дилататор фасциальный диаметром 20 Fr (6,67 мм) – 1 шт.
- игла Чиба – 1 шт.
- игла первичного доступа – 1 шт.
- соединитель для мочеприемника – 1 шт.
- удерживающий диск – 1 шт.
- скальпель – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

[Перевод с английского языка на русский язык]

[На бланке компании «Биорад Медисис Прайвит Лимитед»]

«Утверждаю»
Вице-президент
«Биорад Медисис Пвт. Лтд.»
Бабу П.П.

«Утверждено»
Вице-президент
«Биорад Медисис Пвт. Лтд.»
Бабу П.П.
16.05.2021 г.

[Штамп: От имени «Биорад Медисис Пвт. Лтд.»
/подпись/ Бабу П.П. (Babu P.P.), вице-президент]

[Печать: «БИОРАД МЕДИСИС ПВТ. ЛТД» * БАНГАЛОР-76 * Б.Г. РОАД]

Инструкция по применению медицинского изделия
Катетеры нефростомические типа «Пигтейл» с набором для установки в вариантах исполнения

[Печать: Д.К. РАМЕШАППА, магистр, бакалавр юридических наук * Правительство штата Карнатака, Бангалор * НОТАРИУС, регистр. № LAW 13 LCL 2018] /подпись/

[Штамп: УДОСТОВЕРЕНО МНОЙ /подпись/

Д.К. РАМЕШАППА (D.K. RAMESHAPPA), магистр, бакалавр юридических наук
Адвокат и нотариус

№ 23, 12 Мэйн, 4 Блок Ист, Джаянагар, БАНГАЛОР – 560 011]

[Штамп: 18 МАЯ 2021 г.]

[Печать: ФЕДЕРАЦИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ ШТАТА КАРНАТАКА,
18 МАЯ 2021 г.]

[Штамп: ЗАВЕРЕНО Федерацией торгово-промышленных палат штата Карнатака
/подпись/ Б. ВИДЖАЙЯ КУМАР (B. VIJAYA KUMAR), помощник секретаря]

[Штамп: Настоящее удостоверение оформлено по запросу потребителя без рисков или ответственности со стороны Федерации торгово-промышленных палат штата Карнатака или какого-либо из ее органов с правом подписи]

[Логотип
«ОРТОВЭЙЗНВ»]

Главный офис и производственное предприятие:
Участок № 48/3 и 48/7, Паппан-Сус Роад, Сус Виллиа, Талука
Мужика, Пин 411 021, штат Махараштра, Индия

Эл. почта: rime@bioradmedisys.com

[Логотип
«ИНДОВЭЙЗНВ»]

Офис в Бангалоре и производственное предприятие:
Предприятие «Биорад», № 660, промышленная зона
«Эмбарка», Хулиаалу, Баннергитта Роад Бангалор – 560 076,
штат Карнатака, Индия
Тел.: +91-80-2648 0683/6365 8007, факс: +91-80-2648 0684
Эл. почта: biorad@bioradmedisys.com

bioradmedisys.com

«Биорад Медисис Пвт. Лтд.»

Зарегистрированный офис: 221, промышленный комплекс
«Дамла Шамла», 9 Эм-Би-Эс Марг, Керла (Вост), Мумбаи,
400070, штат Махараштра, Индия

Тел.: +91-22-4263-7008, факс: +91-22-2512-9294

Эл. почта: info@bioradmedisys.com

Идентификационный номер компании:

U33111MH2000PTC263335

[Текст документа на русском языке]

Перевод данного текста выполнен переводчиком Сироткиной Марией Олеговной

С/

Российская Федерация
Город Москва
Тридцатого июля две тысячи двадцать первого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Сироткиной Марии Олеговны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09 – н/77 – 2021 – *58-965*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Г.Б. Акимов

[Handwritten signature]

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью *26* лист(-а, -ов).

Нотариус:

[Handwritten signature]

