



Генеральный директор

ООО «Альфа-Интерферон»

Алимбаева Н.З.

«12» июля 2019.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Покрытие полимерное для обработки и защиты ран AKUTOL™, аэрозоль 60мл»,

производства «АВЕФЛОР, а.с.», Чешская республика. «AVEFLOR, a.s.», Budčeves
26, 50732, Kopidlno, Czech Republic.

Тел.: +420 493 551 111. Факс: +420 493 551 112. E-mail: aveflor@aveflor.cz.



Покрытие полимерное для обработки и защиты ран AKUTOL™, аэрозоль 60мл.



Проект маркировки на русском языке, нанесенный на флакон


Покрывание
полимерное
для обработки и защиты ран

AKUTOL™

аэрозоль 60мл

защитное
полимерное
покрытие

- + водостойкое
- + прозрачное

аэрозоль

Характеристика: Медицинское изделие «Покрывание полимерное для обработки и защиты ран AKUTOL™, аэрозоль 60мл» (далее по тексту: «Покрывание полимерное AKUTOL™») используется для быстрой обработки и защиты от внешних воздействий царапин и небольших поверхностных ран. В течение 2 минут после нанесения на рану аэрозоль застывает и образует водостойкую защитную пленку. Полимерная защита предотвращает проникновение чужеродных веществ из внешней среды, но не препятствует естественной перспирации кожи. Рана остается закрытой от неблагоприятных воздействий, однако под полимерной пленкой происходит процесс заживления. Защитная пленка не растворяется в воде. Пленка самостоятельно исчезает через 3-4 дня вследствие трения. Если этого требует характер повреждения кожи, то через 3 дня можно повторно нанести покрытие полимерное AKUTOL™, аэрозоль. **Способ применения:** Перед употреблением встряхнуть флакон. Флакон держать в вертикальном положении. Кратковременно нажав кнопку, нанести один слой полимерной пленки. Аэрозоль наносить с расстояния 15-20 см от поверхности травмы путем и разглаживать на поверхность участка кожи, подлежащего лечению, таким образом, чтобы аэрозоль не вытекал из зоны обработки. **Предупреждения:** Защитите глаза перед применением. Нанесите один слой защитной пленки. Нанесение нескольких слоев ускоряет естественную перспирацию раны и замедляет процесс заживления. Никогда не используйте продукт, чтобы покрыть рану **смазанной повязкой!**

Меры предосторожности: Чрезвычайно воспламеняемый аэрозоль. Флакон под давлением: возможен взрыв при нагреве. Хранить вне воздействия высокой температуры, удален от горячих поверхностей, мороз, открытого огня и иных источников возгорания. Не курить. Не подвергать воздействию температур выше 50°C/122°F. Не распылять у открытого огня или иных источников возгорания. Не прокалывать или сжигать после использования. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности: 3 года. Дата окончания срока годности указана на дне флакона недели. Состав: Акриловый сополимер 30,9%, Диэкоксиацетатан 70%: 23,7%, Этианол денатурированный: 37,7%, Акриловый сополимер (vinyl 100 P, BASF): 2,6%, Диметилэфи 3,6,0%.

Сведения о утилизации: представителе в РФ: Если с приобретенным медицинским изделием возникают какие-либо проблемы, следует связаться с нашим уполномоченным представителем: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Интерферон» 000 «Альфа-Интерферон» РФ, 109559, Москва, ул. Маршала Баграмяна, д.8/92, +7 495 532 88 94, sarah1970@yandex.ru Номер и дата регистрации: уведомление РУ № _____ от _____

SLE996

ABE-IMP, a.s.,
Výhled 26,
507 32 Копидно,
Чешская республика,
IHN: CZ-64259838,
www.akutol.cz




Опасность


CE
1023

e 60 ml 3



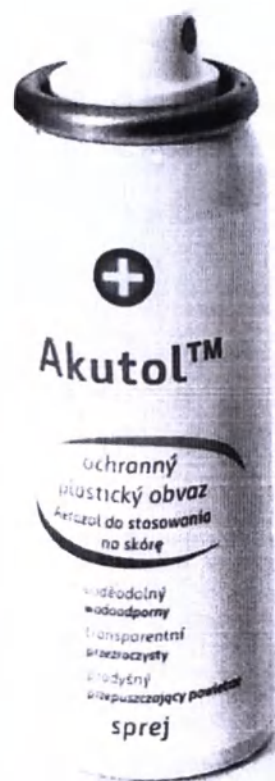

Флакон со снятой защитной крышкой

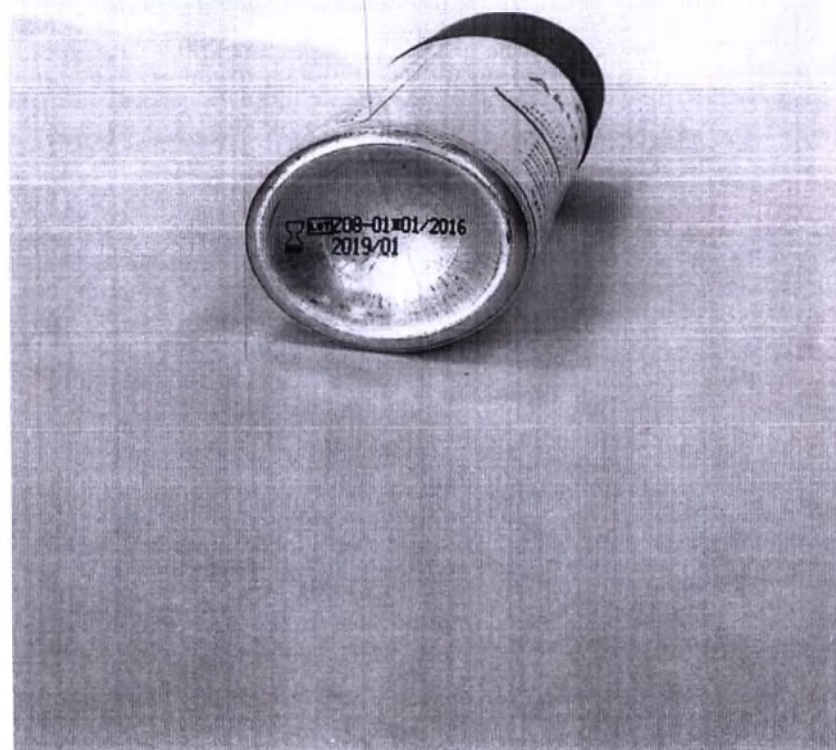

Дно флакона с указанием срока годности вместе с серийным номером



Генеральный директор
ООО «Альфа-Интерферон»

Алимбасва Н.З.

Принято и пронумеровано 6 лист 03