

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»



О.Е. Балашов
О.Е. Балашов

17.09.20
17.09.2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия


**БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ
КОМПРЕССИОННЫЕ**

по ТУ 32.50.22-001-46838010-2020


2020




Общий вид медицинского изделия:
Бандаж медицинский эластичный компрессионный
«ИНТЕКС» на голеностопный сустав «Голеностоп»

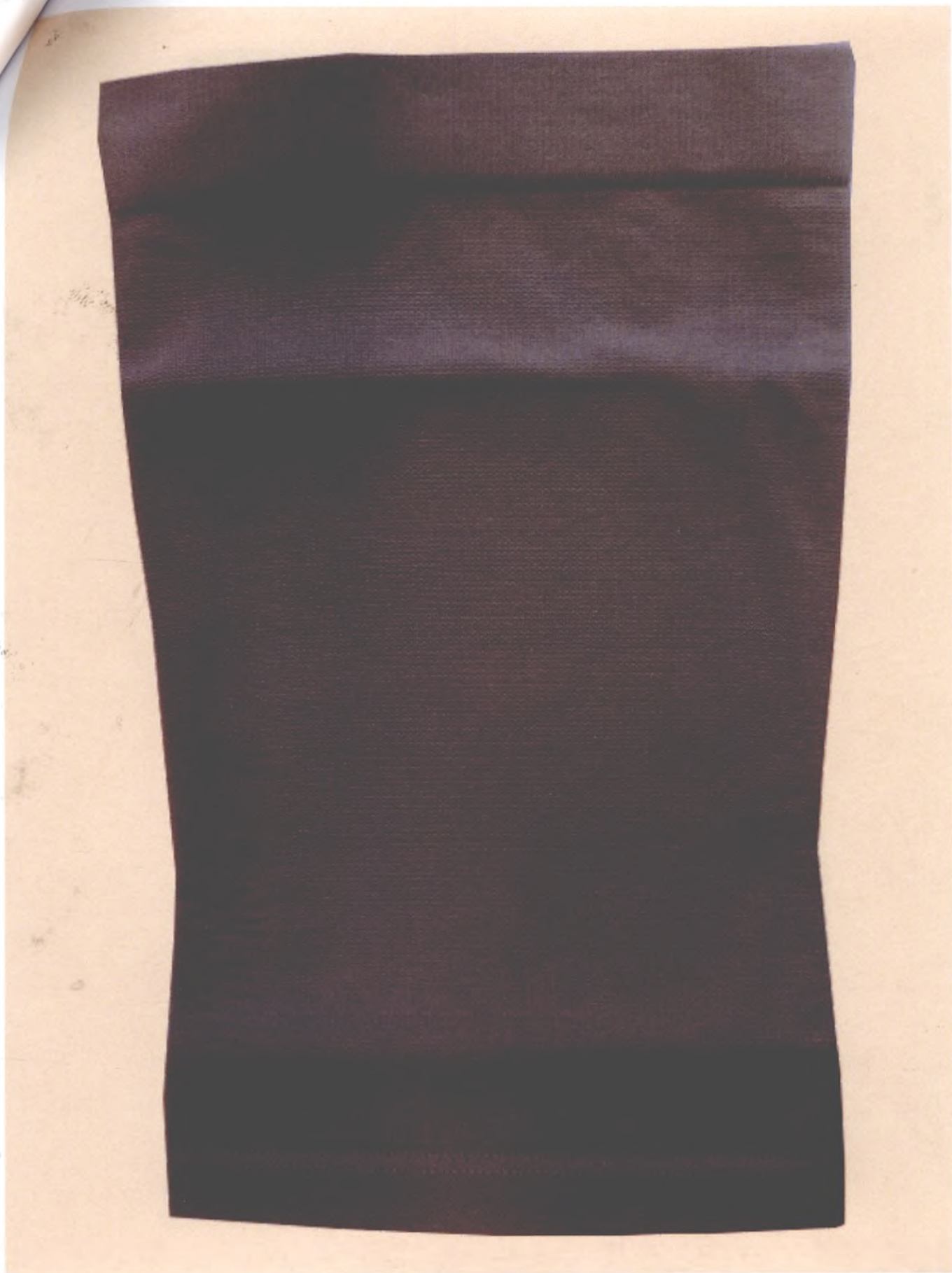

Общий вид медицинского изделия:
Бандаж медицинский эластичный компрессионный
«ИНТЕКС» на коленный сустав «Наколенник»

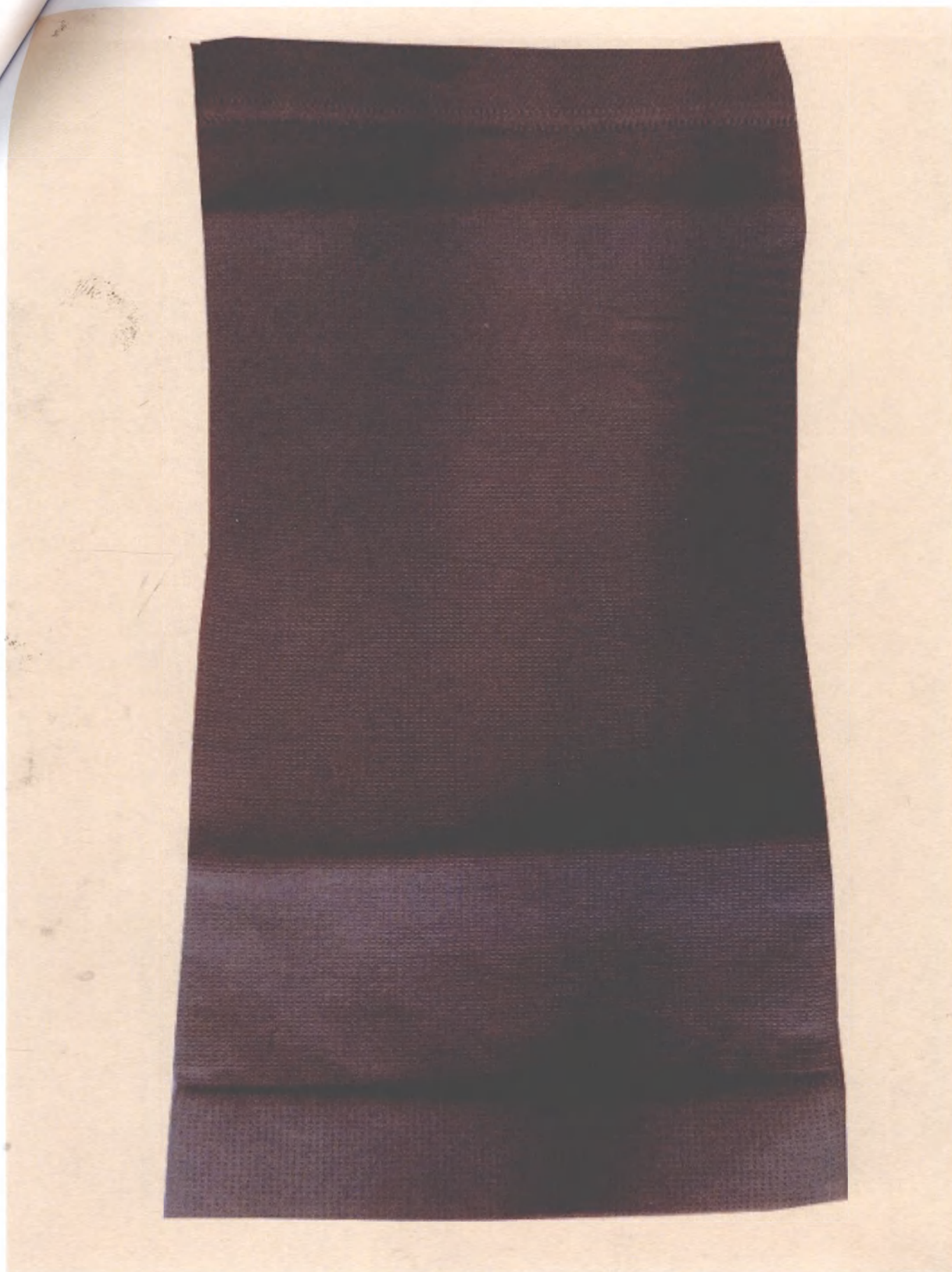

Общий вид медицинского изделия:
Бандаж медицинский эластичный компрессионный
«ИНТЕКС» на локтевой сустав «Налокотник»

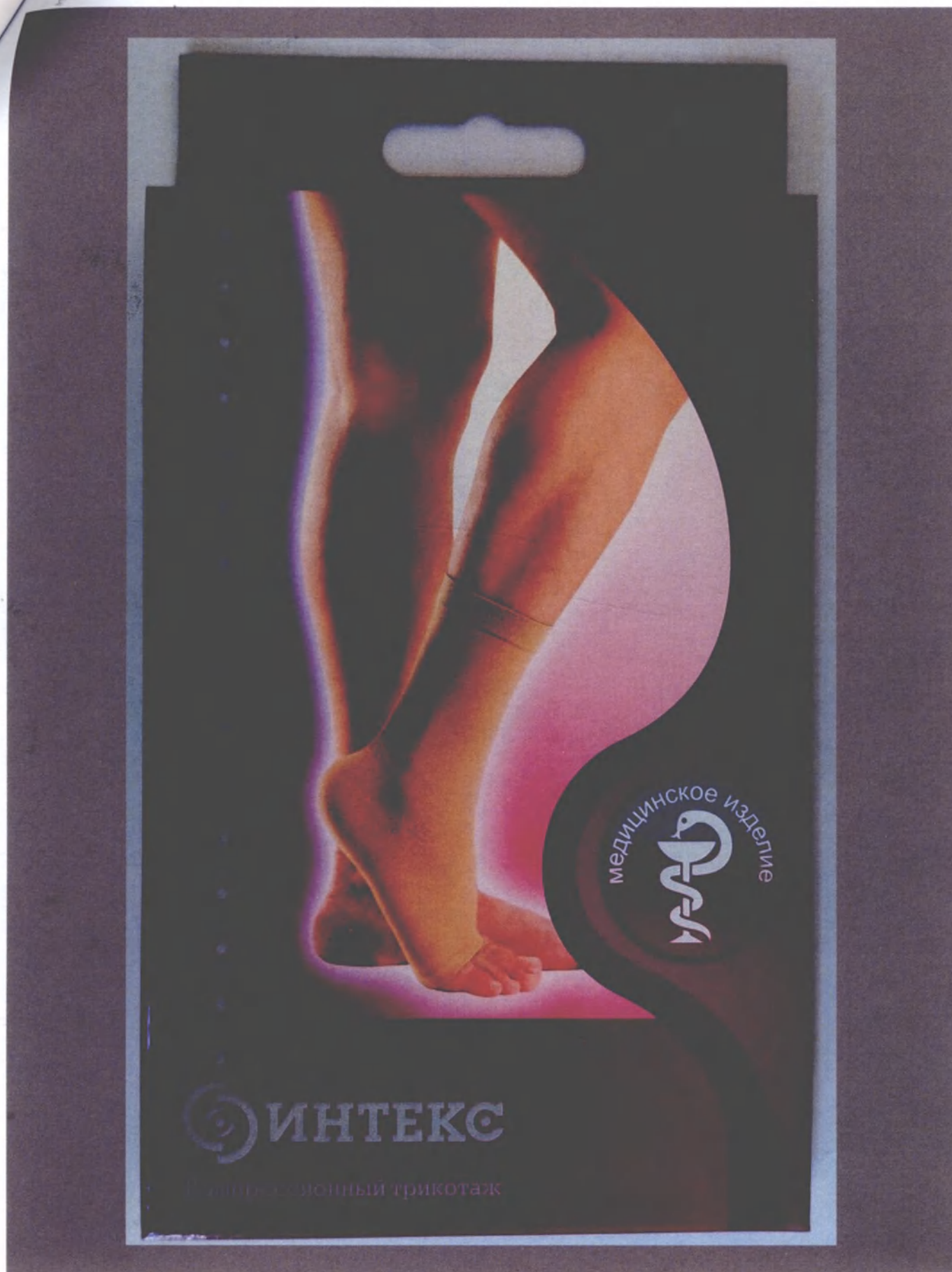

Общий вид потребительской упаковки на примере медицинского изделия:
«Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС»
на голеностопный сустав «Голеностоп» (лицевая сторона)

Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС»

на голеностопный сустав «Голеностоп» III класс компрессии (33-46 мм рт.ст.)

Назначение: в качестве компрессионной терапии для профилактики и лечения:

- послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей; растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов, и снятия связанных с ними отеков, воспалений и болевого синдрома; нарушений лимфатического оттока; нарушения обменных и регенеративных процессов сустава и прилегающих тканей; острых и хронических воспалительных заболеваний суставов и окружающих тканей (эпикондилиты, артриты, тендовагиниты, бурситы, синовиты и т.д.); хронических дегенеративных заболеваний (артроз, остеоартроз, менископатия и др.); легкой нестабильности и избыточной подвижности в суставе; атрофии мышечных тканей после снятия гипса, а также в качестве замены эластичного медицинского компрессионного бинта.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Показания к применению: отеки, ушибы, повреждения мягких тканей, сухожилий и суставов; хронические, послеоперационные и посттравматические заболевания суставов и прилегающих тканей нижних конечностей.

Противопоказания: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (атеросклероз сосудов, синдром Рейно, артериит, тромбангиит, эндартериит), тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, острые инфекции мягких тканей, открытые раны, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется: использовать изделие при наличии экзем, дерматита, псориаза, воспалительных заболеваний кожи и нарушении чувствительности; надевать бандаж после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Изделия подходят для ежедневного использования.

Для увеличения срока службы предпочтительнее пользоваться двумя изделиями, чередуя их надевание через день (особенно актуально при ношении более 10 часов в день). Это помогает Изделиям «отдохнуть» и полностью восстановить свои компрессионные свойства. В случае ношения одного изделия на протяжении 6 месяцев, рекомендуется замена на новое, в связи с возможной потерей компрессионных свойств.

Рекомендации по применению: бандаж для нижних конечностей «Голеностоп» надевают в положении сидя, крепко держа обеими руками и постепенно натягивая на конечность одновременно с двух сторон, при этом травмированная нога должна быть согнута под углом приблизительно в 30°.

Для облегчения надевания бандажа можно воспользоваться резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений Изделия перед надеванием бандажей обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти. Перед надеванием обуви обязательно убедитесь в отсутствии выступающих элементов, которые могут привести к повреждению бандажей. Не рекомендуется тянуть изделия в местах, где находятся швы. Не используйте изделия с повреждениями.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидкого мыла или детских стиральных порошков при температуре не превышающей 40° С, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при температуре 20-25° С на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Примечание: не рекомендуется подвешивать Изделия при сушке во избежание потери их формы и компрессионных свойств.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить бандажи, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Рекомендации по измерению параметров для подбора размера: Измерения для подбора размера бандажа рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

Таблица подбора размера:

Параметр	S	M	L	XL
Обхват в области голеностопного сустава (b), см.	19-22	22-25	25-28	29-32

Примечание: Производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанной в таблице.

Состав: эластан, полиамид.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: 1 (I) - в сухом помещении при t от +5°С до +25°С, в местах недоступных для детей. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств - 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

Условия утилизации: согласно СанПин 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «А».

Допускается утилизировать изделия вместе с бытовыми отходами.

ТУ 32.50.22-001-46838010-2020 РУ №


Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ» корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 52, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1

Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5

Телефон: (495) 528-51-09/528-86-82

www.bint.ru/info@bint.ru

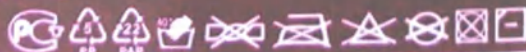


ВНИМАНИЕ!

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (Постановление правительства РФ от 31.12.2020 № 2463).

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению!



Общий вид потребительской упаковки на примере медицинского изделия:
«Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС»
на голеностопный сустав «Голеностоп» (оборотная сторона)

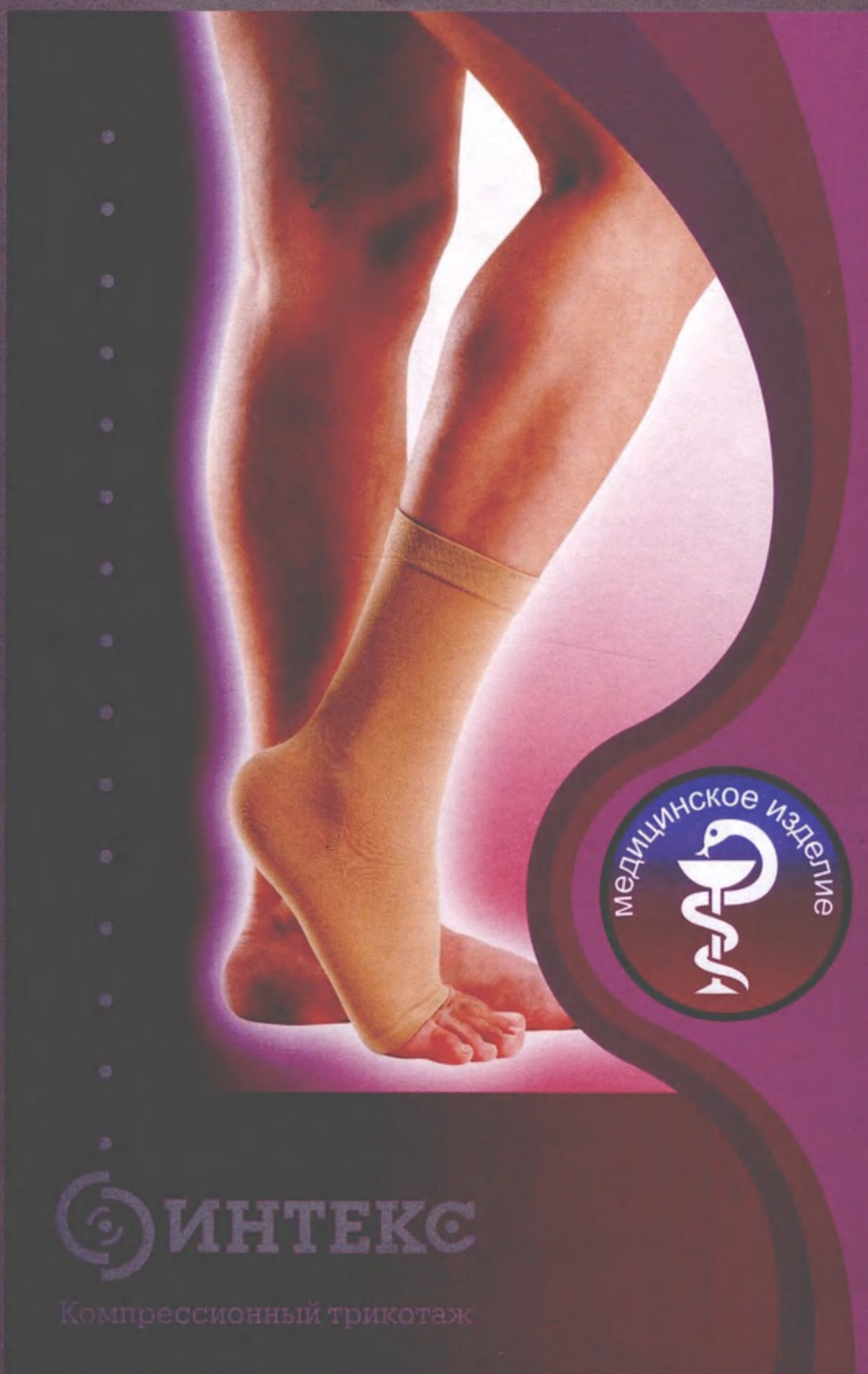

**Общий вид макета потребительской упаковки на примере медицинского изделия:
«Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС»
на голеностопный сустав «Голеностоп» (лицевая сторона)**

Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС»

на голеностопный сустав «Голеностоп» III класс компрессии (33-46 мм рт.ст.)

Назначение: в качестве компрессионной терапии для профилактики и лечения:

- послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей; растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов, и снятия связанных с ними отеков, воспалений и болевого синдрома; нарушений лимфатического оттока; нарушения обменных и регенеративных процессов сустава и прилегающих тканей; острых и хронических воспалительных заболеваний суставов и окружающих тканей (эпикондилиты, артриты, тендовагиниты, бурситы, синовиты и т.д.); хронических дегенеративных заболеваний (артроз, остеоартроз, менископатия и др.); легкой нестабильности и излишней подвижности в суставе; атрофии мышечных тканей после снятия гипса, а также в качестве замены эластичного медицинского компрессионного бинта.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Показания к применению: отеки, ушибы, повреждения мягких тканей, сухожилий и суставов; хронические, послеоперационные и посттравматические заболевания суставов и прилегающих тканей нижних конечностей.

Противопоказания: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (атеросклероз сосудов, синдром Рейно, аортоартериит, тромбангиит, эндартериит), тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, острые инфекции мягких тканей, открытые раны, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется: использовать изделие при наличии экзем, дерматита, псориаза, воспалительных заболеваний кожи и нарушении чувствительности; надевать бандаж после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Изделия подходят для ежедневного использования.

Для увеличения срока службы предпочтительнее пользоваться двумя изделиями, чередуя их надевание через день (особенно актуально при ношении более 10 часов в день). Это помогает Изделиям «отдохнуть» и полностью восстановить свои компрессионные свойства. В случае ношения одного изделия на протяжении 6 месяцев, рекомендуется замена на новое, в связи с возможной потерей компрессионных свойств.

Рекомендации по применению: бандаж для нижних конечностей «Голеностоп» надевают в положении сидя, крепко держа обеими руками и постепенно натягивая на конечность одновременно с двух сторон, при этом травмированная нога должна быть согнута под углом приблизительно в 30°.

Для облегчения надевания Бандажа можно воспользоваться резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений Изделия перед надеванием бандажей обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти. Перед надеванием обуви обязательно убедитесь в отсутствии выступающих элементов, которые могут привести к повреждению бандажей. Не рекомендуется тянуть изделия в местах, где находятся швы. Не используйте изделия с повреждениями.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидкого мыла или детских стиральных порошков при температуре, не превышающей 40° С, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при температуре 20±5° С на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Примечание: не рекомендуется подвешивать Изделия при сушке во избежание потери их формы и компрессионных свойств.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить бандажи, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Рекомендации по измерению параметров для подбора размера: Измерения для подбора размера бандажа рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

Таблица подбора размера:

Параметр	S	M	L	XL
Обхват в области голеностопного сустава (b), см.	19-22	22-25	25-28	29-32

Примечание: Производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблице.

Состав: эластан, полиамид.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: 1 (л) - в сухом помещении при t от +5°С до +25°С, в местах недоступных для детей. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств - 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

Условия утилизации: согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «А».

Допускается утилизировать изделия вместе с бытовыми отходами.

ТУ 32.50.22-001-46838010-2020 РУ №


Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1

Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5

Телефон: (495) 528-51-09/528-86-82


www.bint.ru/info@bint.ru

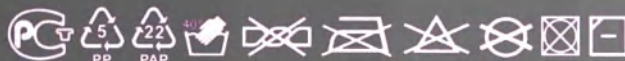

ВНИМАНИЕ!

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (Постановление правительства РФ от 31.12.2020 № 2463).

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению!

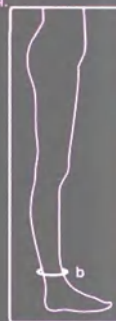

Общий вид макета потребительской упаковки на примере медицинского изделия:
«Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС»
на голеностопный сустав «Голеностоп» (оборотная сторона)



Общий вид медицинского изделия:
Бандаж медицинский эластичный компрессионный
«ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ» на голеностопный сустав «Голеностоп»



Общий вид медицинского изделия:
Бандаж медицинский эластичный компрессионный
«ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ» на коленный сустав «Наколенник»



**Общий вид медицинского изделия:
Бандаж медицинский эластичный компрессионный
«ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ» на локтевой сустав «Налокотник»**

Бандаж медицинский эластичный
компрессионный «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
на локтевой сустав «Налокотник»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРОДУКТ
НОВИНКА
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

БАНДАЖ
НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
"УНИВЕРСАЛ"



ИНТЕКС
КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ


1 класс
компрессии


ЕДИНЫЙ
размер, не требует
индивидуального
подбора




универсальный размер S~XL

Общий вид потребительской упаковки на примере медицинского изделия:
«Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
на локтевой сустав «Налокотник» (лицевая сторона)

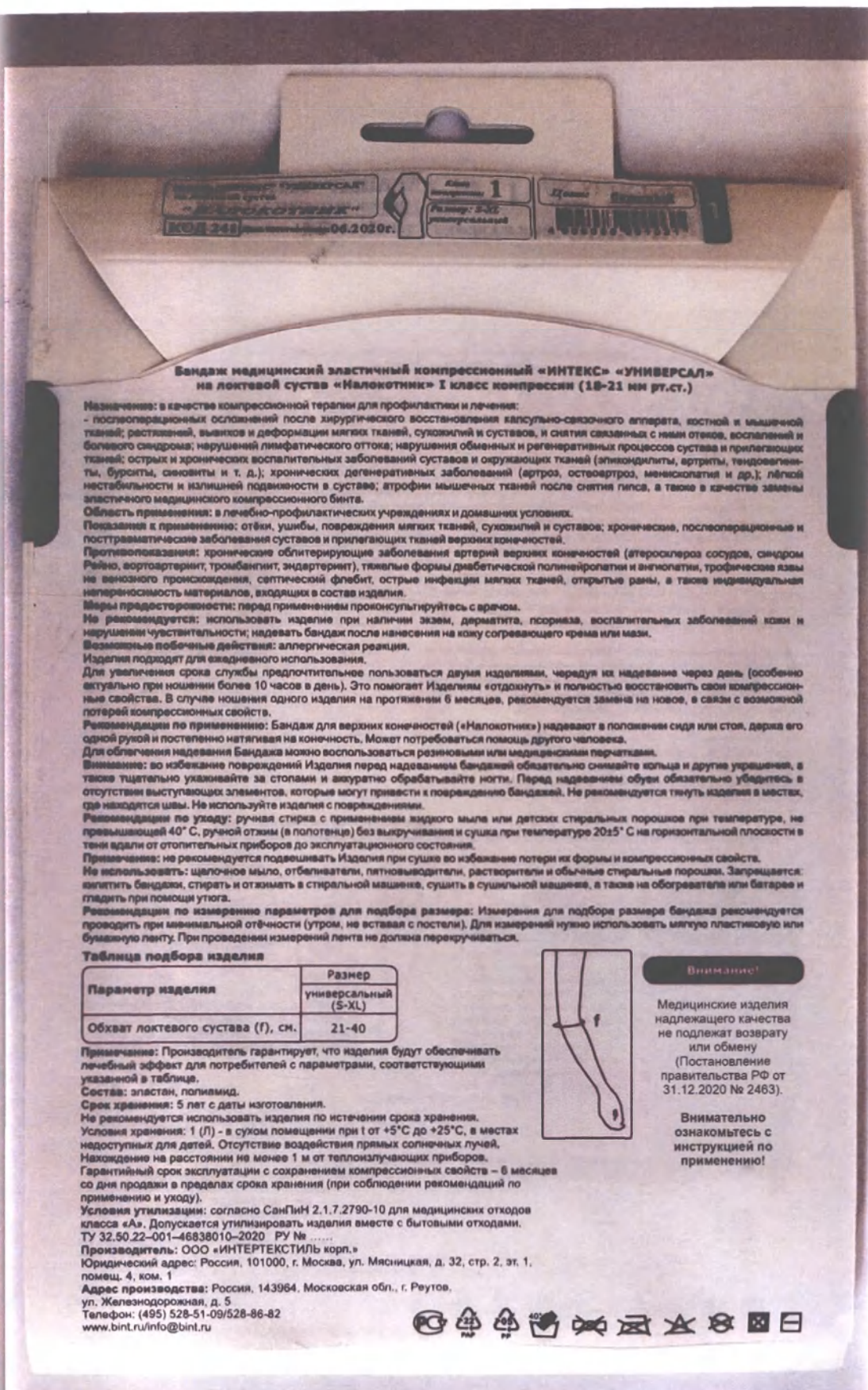

**Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
на локтевой сустав «Налокотник» I класс компрессии (18-21 мм рт.ст.)**

Назначение: в качестве компрессионной терапии для профилактики и лечения:

- послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей; растяжений, вывихов и деформаций мягких тканей, сухожильий и суставов, и снятия связанных с ними отеков, воспалений и болевого синдрома; нарушения лимфатического оттока; нарушения обменных и регенеративных процессов сустава и прилегающих тканей; острых и хронических воспалительных заболеваний суставов и окружающих тканей (эпикондилиты, артриты, тендовагиниты, бурситы, синовиты и т. д.); хронических дегенеративных заболеваний (артроз, остеоартроз, менископатии и др.); легкой неустойчивости и излишней подвижности в суставе; атрофии мышечных тканей после снятия гипса, а также в качестве замены эластичного медицинского компрессионного бинта.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Показания к применению: отеки, ушибы, повреждения мягких тканей, сухожильий и суставов; хронические, послеоперационные и посттравматические заболевания суставов и прилегающих тканей верхних конечностей.

Противопоказания: хронические облитерирующие заболевания артерий верхних конечностей (атеросклероз сосудов, синдром Рейно, аортоартерит, тромбангиит, эндартериит), тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии, трофические язвы на венозного происхождения, септический флебит, острые инфекции мягких тканей, открытые раны, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется использовать изделие при наличии экзем, дерматита, псориаза, воспалительных заболеваний кожи и нарушении чувствительности; надевать бандаж после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Изделия подходят для ежедневного использования.

Для увеличения срока службы предпочтительнее пользоваться двумя изделиями, чередуя их надевание через день (особенно актуально при ношении более 10 часов в день). Это помогает Изделиям «отдохнуть» и полностью восстановить свои компрессионные свойства. В случае ношения одного изделия на протяжении 6 месяцев, рекомендуется замена на новое, в связи с возможной потерей компрессионных свойств.

Рекомендации по применению: Бандаж для верхних конечностей («Налокотник») надевают в положении сидя или стоя, держа его одной рукой и постепенно натягивая на конечность. Может потребоваться помощь другого человека.

Для облегчения надевания Бандажа можно воспользоваться резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений Изделия перед надеванием бандажей обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти. Перед надеванием обуви обязательно убедитесь в отсутствии выступающих элементов, которые могут привести к повреждению бандажей. Не рекомендуется тянуть изделие в местах, где находится швы. Не используйте изделия с повреждениями.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидкого мыла или детских стиральных порошков при температуре, не превышающей 40°С, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при температуре 20±5°С на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Примечание: не рекомендуется подшивать Изделия при сушке во избежание потери их формы и компрессионных свойств.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить бандажи, стирать и отжимать в стиральной машине, сушить в сушильной машине, а также на обогревателях или батареях и гладить при помощи утюга.

Рекомендации по измерению параметров для подбора размера: Измерения для подбора размера бандажа рекомендуется проводить при минимальной отёчности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

Таблица подбора изделия

Параметр изделия	Размер
	универсальный (S-XL)
Обхват локтевого сустава (f), см.	21-40

Примечание: Производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанной в таблице.

Состав: эластан, полиамид.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: 1 (л) - в сухом помещении при t от +5°С до +25°С, в местах недоступных для детей. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств - 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

Условия утилизации: согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизировать изделия вместе с бытовыми отходами.

ТУ 32.50.22-001-46838010-2020 РУ №

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ» корп.»


Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1

Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5

Телефон: (495) 528-51-09/528-86-82


www.bint.ru/info@bint.ru

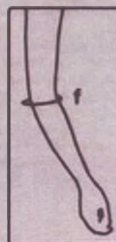

Внимание!

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (Постановление правительства РФ от 31.12.2020 № 2463).

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению!

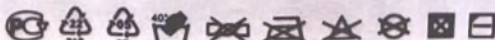

Общий вид потребительской упаковки на примере медицинского изделия:
«Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
на локтевой сустав «Налокотник» (оборотная сторона)

Бандаж медицинский эластичный
компрессионный «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
на локтевой сустав «Налокотник»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРОДУКТ

НОВИНКА

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

БАНДАЖ
НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
"УНИВЕРСАЛ"



ИНТЕКС

КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1 класс
компрессии


ЕДИНЫЙ
размер, не требует
индивидуального
подбора




универсальный размер S~XL

Общий вид макета потребительской упаковки на примере медицинского изделия:
«Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
на локтевой сустав «Налокотник» (лицевая сторона)

**Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
на локтевой сустав «Налокотник» I класс компрессии (18-21 мм рт.ст.)**

Назначение: в качестве компрессионной терапии для профилактики и лечения:

- послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей; растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов, и снятия связанных с ними отеков, воспалений и болевого синдрома; нарушений лимфатического оттока; нарушения обменных и регенеративных процессов сустава и прилегающих тканей; острых и хронических воспалительных заболеваний суставов и окружающих тканей (эпикондилиты, артриты, тендовагиниты, бурситы, синовиты и т. д.); хронических дегенеративных заболеваний (артроз, остеоартроз, менископатия и др.); лёгкой нестабильности и излишней подвижности в суставе; атрофии мышечных тканей после снятия гипса, а также в качестве замены эластичного медицинского компрессионного бинта.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Показания к применению: отеки, ушибы, повреждения мягких тканей, сухожилий и суставов; хронические, послеоперационные и посттравматические заболевания суставов и прилегающих тканей верхних конечностей.

Противопоказания: хронические облитерирующие заболевания артерий верхних конечностей (атеросклероз сосудов, синдром Рейно, аортоартериит, тромбангиит, эндартериит), тяжёлые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, острые инфекции мягких тканей, открытые раны, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется: использовать изделие при наличии экзем, дерматита, псориаза, воспалительных заболеваний кожи и нарушении чувствительности; надевать бандаж после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Изделия подходят для ежедневного использования.

Для увеличения срока службы предпочтительнее пользоваться двумя изделиями, чередуя их надевание через день (особенно актуально при ношении более 10 часов в день). Это помогает Изделиям «отдохнуть» и полностью восстановить свои компрессионные свойства. В случае ношения одного изделия на протяжении 6 месяцев, рекомендуется замена на новое, в связи с возможной потерей компрессионных свойств.

Рекомендации по применению: Бандаж для верхних конечностей («Налокотник») надевают в положении сидя или стоя, держа его одной рукой и постепенно натягивая на конечность. Может потребоваться помощь другого человека.

Для облегчения надевания Бандажа можно воспользоваться резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений Изделия перед надеванием бандажей обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти. Перед надеванием обуви обязательно убедитесь в отсутствии выступающих элементов, которые могут привести к повреждению бандажей. Не рекомендуется тянуть изделия в местах, где находятся швы. Не используйте изделия с повреждениями.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидкого мыла или детских стиральных порошков при температуре, не превышающей 40° С, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при температуре 20±5° С на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Примечание: не рекомендуется подвешивать Изделия при сушке во избежание потери их формы и компрессионных свойств.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить бандажи, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Рекомендации по измерению параметров для подбора размера: Измерения для подбора размера бандажа рекомендуется проводить при минимальной отёчности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

Таблица подбора изделия

Параметр изделия	Размер
	универсальный (S-XL)
Обхват локтевого сустава (f), см.	21-40

Примечание: Производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанной в таблице.

Состав: эластан, полиамид.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: 1 (л) - в сухом помещении при t от +5°С до +25°С, в местах

недоступных для детей. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей.

Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств – 6 месяцев

со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по

применению и уходу).

Условия утилизации: согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов

класса «А». Допускается утилизировать изделия вместе с бытовыми отходами.

ТУ 32.50.22-001-46838010-2020 РУ №

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1,

помещ. 4, ком. 1

Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5

Телефон: (495) 528-51-09/528-86-82


www.bint.ru/info@bint.ru




Внимание!

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену
(Постановление правительства РФ от 31.12.2020 № 2463).

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению!

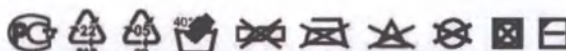

Общий вид макета потребительской упаковки на примере медицинского изделия:
«Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
на локтевой сустав «Налокотник» (оборотная сторона)

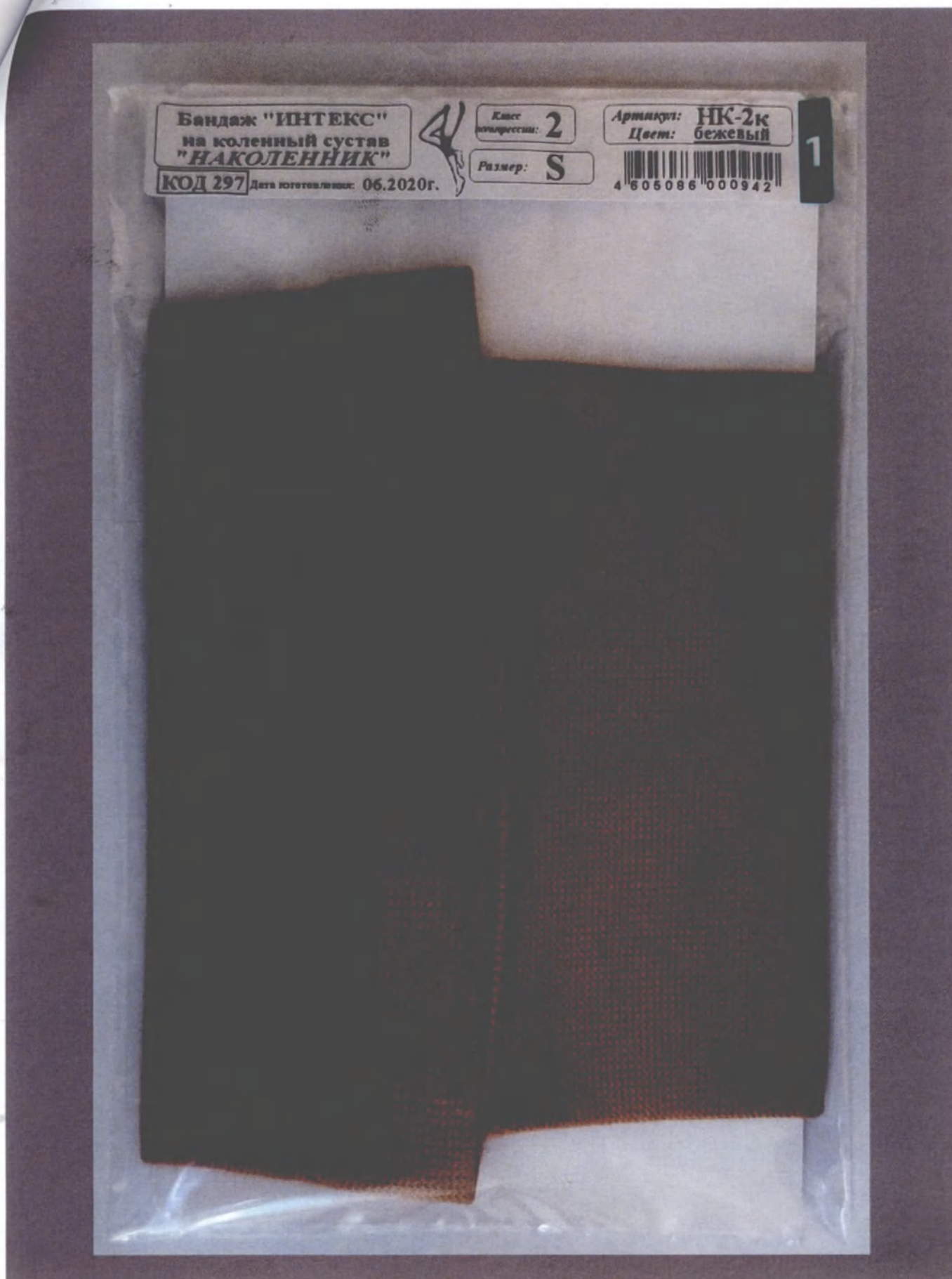

Общий вид изделия в вспомогательной упаковке (вкладывается в потребительскую упаковку)
на примере медицинского изделия:
«Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС» на коленный сустав «Наколенник»



Бандаж «ИНТЕКС»
на коленный сустав «Наколенник»
Размер: S
ТУ 32.50.22-001-46838010-2020
ТУ №.....
Количество изделий в упаковке - 1 шт.
КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК - 20 шт.
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ - 06.2020
НОМЕР ПАРТИИ 06.2020
СРОК ХРАНЕНИЯ - 5 ЛЕТ
НОМЕР УПАКОВЩИКА - 1
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»



Общий вид транспортной упаковки на примере медицинского изделия:
«Бандаж медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС»
на коленный сустав «Наколенник»

прошито и
скреплено печатью

Смнарцать лист 06
Директор
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
Балашихин О.Е.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

О.Е. Балашов

2020 г.



ПРОЕКТ ЭТИКЕТКИ
медицинского изделия
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ
по ТУ 32.50.22-001-46838010-2020

- наименование и товарный знак предприятия-производителя, юридический адрес, адрес производства, телефон, сайт/электронный адрес;
- страна-производитель;
- наименование изделия;
- размер изделия;
- состав изделия;
- класс компрессии;
- назначение;
- область применения;
- показания к применению;
- противопоказания к применению;
- меры предосторожности;
- возможные побочные действия;
- рекомендации по применению;
- рекомендации по уходу;
- таблица, схема и рекомендации по измерению параметров для подбора размера Изделия;
- условия хранения;
- условия утилизации;
- фраза «Перед использованием обязательно ознакомится с рекомендациями или инструкцией по применению»;
- фраза «Бандажи подходят для ежедневного использования»;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- срок хранения;
- гарантийный срок эксплуатации;
- стикер с указанием краткого наименования изделия, класса компрессии, размера, цвета, штрих-кода, артикула, даты изготовления и номера партии, включенного в дату изготовления;

- знаки обращения и переработки



- знаки по уходу



- фраза «Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену»
(Постановление правительства РФ от 31.12.2020 № 2463);
- символы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- текст, графические символы, изображения и рисунки, поясняющие потребительские свойства, назначения и применение бандажей.
- товарный знак «ИНТЕКС».

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д.32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн.1

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5

тел.: 8 (495) 528-51-09; 528-86-82, www.bint.ru/info@bint.ru