


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Алан-Абрис»

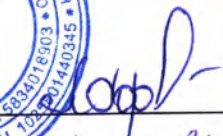

 Гордеева Л.В.

«01» февраля 2021 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оправы для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлические по ТУ 32.50.43-003-50562192-2021, товарный знак GRESSO, в вариантах исполнения

2021 г.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Настоящее Руководство распространяются на оправы корригирующих очков металлических (далее – изделие, оправы).

Наименование

Оправы для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлические по ТУ 32.50.43-003-50562192-2021, товарный знак GRESSO, в вариантах исполнения:

Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Essex титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Essex сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Cleveland титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Cleveland сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Philadelphia титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Philadelphia сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Aspen титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Aspen сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Lexington титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Lexington сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Lincoln титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Lincoln сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Sacramento титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Sacramento сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Riverside титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Riverside сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Charlotte титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Charlotte сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Aurora титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Aurora сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Helena титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Helena сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Victoria титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Victoria сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Havana титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Havana сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Catalina титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Catalina сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Georgia титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Georgia сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Sierra титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Sierra сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Carmel титан
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Carmel сталь
Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Alberta титан

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

[illegible]

Назначение

Оправы предназначены для фиксации линз и правильного положения линз относительно глаз.

Условия применения

Предназначены для индивидуального использования в медицинских учреждениях и вне их, в том числе на дому.

Потенциальный потребитель

Предназначено для использования рядовым пользователем. Эксплуатация данного изделия не требует квалификации врача или специального обучения.

Показания

Для фиксации линз при изготовлении очков.

Противопоказания и возможные побочные действия

Отсутствуют.

Оценка рисков

Работа с изделием не несет в себе каких-либо серьезных рисков для здоровья пользователя.

Меры предосторожности при применении медицинского изделия

При применении оправ следует соблюдать осторожность при занятиях спортом и производстве работ, предполагающих резкие движения головой, наклоны, прыжки и удары.

Способ эксплуатации

1. Проверьте целостность упаковки. Если целостность упаковки не нарушена, откройте её.

2. Достаньте оправу из упаковки.

3. Проверьте целостность оправы и внешний вид изделия.

Если целостность изделия или его внешний вид вызывают сомнения, обратитесь к производителю за дополнительной информацией. Не выкидывайте оригинальную упаковку.

4. Все, изделие готово к эксплуатации.

Очистка и дезинфекция

Не требует очистки и дезинфекции.

Стерилизация

Нестерильное изделие. Не требует стерилизации.

Технические характеристики

Подпись и дата

Инт. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инт. № дубл.

Технические характеристики см. в Приложении.

Материалы

Не содержит материалов животного и (или) человеческого происхождения, лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

Цвет

В производстве изделия не используются какие-либо пигменты или красители. Цвет (Черный, Золото) достигается за счет использования технологии нанесения покрытий методом PVD (осаждение атомов металла на изделие).

Наименование изделия/элемента		Материал
Essex, Cleveland, Philadelphia, Aspen, Lexington, Lincoln, Sacramento, Riverside, Charlotte, Aurora, Helena, Victoria, Havana, Catalina, Georgia, Sierra, Carmel, Alberta, Houston, Columbus, Denver, Henderson, Turin, Buffalo, Scottsdale, Bristol, Concord, Birmingham, Bremen, Basel, Dublin, Montreal, Potsdam, Augusta, Granada, Pasadena, Ottawa	Рамка	
	Титан: В-Titan 15333	
	Нержавеющая сталь: AISI 301	
	Шарнир (петля)	Нержавеющая сталь: AISI 301
		Нержавеющая сталь: AISI 301
		Нержавеющая сталь: AISI 301
		Нержавеющая сталь: AISI 301
		Нержавеющая сталь: AISI 301
		Нержавеющая сталь: AISI 301
	Заушник	
	Титан: В-Titan 15333	
	Нержавеющая сталь: AISI 301	
Носовой упор		Силикон ZX-1
Наконечник заушника		Силикон ZX-1

Комплектность

Комплектность изделия должна соответствовать таблице ниже

Наименование	Обозначение	Кол-во шт.
Оправы для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлические по ТУ 32.50.43-003-50562192-2021, товарный знак GRESSO, в вариантах исполнения		
Состав:		
1. Оправа для очков, в вариантах исполнения	ОПР.001.50562192	1
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Essex титан	ОПР.001.50562192-001	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Essex сталь	ОПР.001.50562192-002	-

Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Cleveland титан	ОПР.001.50562192-003	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Cleveland сталь	ОПР.001.50562192-004	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Philadelphia титан	ОПР.001.50562192-005	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Philadelphia сталь	ОПР.001.50562192-006	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Aspen титан	ОПР.001.50562192-007	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Aspen сталь	ОПР.001.50562192-008	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Lexington титан	ОПР.001.50562192-009	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Lexington сталь	ОПР.001.50562192-010	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Lincoln титан	ОПР.001.50562192-011	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Lincoln сталь	ОПР.001.50562192-012	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Sacramento титан	ОПР.001.50562192-013	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Sacramento сталь	ОПР.001.50562192-014	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Riverside титан	ОПР.001.50562192-015	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Riverside сталь	ОПР.001.50562192-016	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Charlotte титан	ОПР.001.50562192-017	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Charlotte сталь	ОПР.001.50562192-018	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Aurora титан	ОПР.001.50562192-019	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Aurora сталь	ОПР.001.50562192-020	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Helena титан	ОПР.001.50562192-021	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Helena сталь	ОПР.001.50562192-022	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Victoria титан	ОПР.001.50562192-023	-

Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Victoria сталь	ОПР.001.50562192-024	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Havana титан	ОПР.001.50562192-025	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Havana сталь	ОПР.001.50562192-026	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Catalina титан	ОПР.001.50562192-027	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Catalina сталь	ОПР.001.50562192-028	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Georgia титан	ОПР.001.50562192-029	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Georgia сталь	ОПР.001.50562192-030	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Sierra титан	ОПР.001.50562192-031	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Sierra сталь	ОПР.001.50562192-032	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Carmel титан	ОПР.001.50562192-033	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Carmel сталь	ОПР.001.50562192-034	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Alberta титан	ОПР.001.50562192-035	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Alberta сталь	ОПР.001.50562192-036	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Houston титан	ОПР.001.50562192-037	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Houston сталь	ОПР.001.50562192-038	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Columbus титан	ОПР.001.50562192-039	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Columbus сталь	ОПР.001.50562192-040	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Denver титан	ОПР.001.50562192-041	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Denver сталь	ОПР.001.50562192-042	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Henderson титан	ОПР.001.50562192-043	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Henderson сталь	ОПР.001.50562192-044	-

Подпись и дата Изм. № доп. Взам. инв. № Изм. № доп.	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Turin титан	ОПР.001.50562192-045	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Turin сталь	ОПР.001.50562192-046	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Buffalo титан	ОПР.001.50562192-047	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Buffalo сталь	ОПР.001.50562192-048	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Scottsdale титан	ОПР.001.50562192-049	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Scottsdale сталь	ОПР.001.50562192-050	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Bristol титан	ОПР.001.50562192-051	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Bristol сталь	ОПР.001.50562192-052	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Concord титан	ОПР.001.50562192-053	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Concord сталь	ОПР.001.50562192-054	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Birmingham титан	ОПР.001.50562192-055	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Birmingham сталь	ОПР.001.50562192-056	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Bremen титан	ОПР.001.50562192-057	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Bremen сталь	ОПР.001.50562192-058	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Basel титан	ОПР.001.50562192-059	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Basel сталь	ОПР.001.50562192-060	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Dublin титан	ОПР.001.50562192-061	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Dublin сталь	ОПР.001.50562192-062	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Montreal титан	ОПР.001.50562192-063	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Montreal сталь	ОПР.001.50562192-064	-
	Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Potsdam титан	ОПР.001.50562192-065	-

Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Potsdam сталь	ОПР.001.50562192-066	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Augusta титан	ОПР.001.50562192-067	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Augusta сталь	ОПР.001.50562192-068	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Granada титан	ОПР.001.50562192-069	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Granada сталь	ОПР.001.50562192-070	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Pasadena титан	ОПР.001.50562192-071	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Pasadena сталь	ОПР.001.50562192-072	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Ottawa титан	ОПР.001.50562192-073	-
Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Ottawa сталь	ОПР.001.50562192-074	-
2. Руководство по эксплуатации	ОПР.001.50562192.РЭ	1

Маркировка

Маркировку наносят методами формования, декалькомании, тиснения, печати, штампа, гравировкой в форме и иными пригодными способами на этикетку или коробку.

Маркировка оправ должна наноситься на заушники и включать в себя:

- шифр или наименование модели, размеры a, b, L по ГОСТ с - с внутренней стороны правого заушника;
- наименование (условное обозначение покрытия) - с внутренней стороны левого заушника;

В случае технологической невозможности нанесения маркировки на изделие в процессе его изготовления допускается маркировку указывать на ярлыке, прикрепляемом к изделию или вкладываемом в упаковку изделия, или на аппликации.

Маркировка упаковки изделий должна содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и товарный знак, юридический адрес;
- телефон, электронный адрес предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;

- артикул изделия;
- дата изготовления (месяц, год);
- срок службы;
- гарантийный срок;
- материал, из которого изготовлено изделие;
- цвет модели;
- размер изделия;
- штрих-код (при наличии);
- номер настоящих технических условий;
- номер и дата Регистрационного удостоверения;
- сведения о сертификации (при ее осуществлении) и знака соответствия по ГОСТ

Р 50460.

Маркировка транспортной тары должна быть выполнена по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474 с указанием реквизитов по 1.5.3 и манипуляционных знаков: «Хрупкое, осторожно», «Верх», «Ограничение температуры» или др.

Маркировка оправ должна содержать следующие данные:

- логотип предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- артикул изделия.

Маркировка групповой упаковки должна содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и товарный знак, юридический адрес;
- телефон, электронный адрес предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- номинальные значения основных размеров;
- номер технических условий;
- количество оправ;
- дата упаковывания.

Расшифровка артикула представляет следующее:

XXXXXXXXXXXX

- первый символ – X принадлежность к марке Gresso (G)
- второй и третий символ – XX порядковый номер модели (таблица):

...	
17	Sacramento
18	Lexington
19	Aspen
20	Denver
...	
...	
...	
...	

- четвертый символ – X материал оправы (Т-титан, S-сталь)
- пятый символ – X цвет оправы (В-черный, G-золото, N-бесцветный)
- шестой и седьмой символ – XX порядковый цвет линзы (таблица):

00	2N9000	прозрачные
	4N9990	прозрачные
	6P9900	прозрачные
...	...	
	...	
	...	
	...	
...	...	
...	...	
...	...	

- восьмой символ – X последняя цифра года выпуска модели(геометрии) оправы;
- девятый символ – X категория модели (S-солнце, О-оптика);
- десятый символ – X кривизна оправы (2,4,6);
- одиннадцатый символ – X наличие поляризации (P)

Пример расшифровки артикула:

G19TB000O4

Модель оправы Aspen, материал – титан, цвет оправы – черный, цвет линзы – прозрачная, 2020года, категория – оптика, кривизна – 4.

Упаковка

Поставляемые изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении и исключающую попадание на продукцию загрязняющих веществ.

Упаковка изделий должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Изделия упаковываются в пакеты, полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811, термоусадочную пленку по ГОСТ 25951, кожаные футляры. Упакованные изделия укладывают согласно спецификации в картонные коробки по ГОСТ 33781.

Изделия, упакованные в полиэтиленовую упаковку, должны быть плотно уложены в групповые упаковочные коробки. В групповую упаковочную коробку должны быть уложены оправы одного типа с одинаковыми основными размерами.

Коробки, оклеивают лентой по ГОСТ 18251 или обвязывают шпагатом по ГОСТ 17308.

Количество и номенклатура изделий, дополнительные упаковочные материалы указывают в технологической документации на конкретный набор (артикул).

Допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.

Прочность транспортной тары должна обеспечивать сохранность продукции в условиях многоярусной загрузки (3,3 м).

Масса брутто должна составлять не более 25 кг.

Изделия, упакованные в транспортную тару, формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 24597 на поддонах по ГОСТ 33757, на пакетах-поддонах.

Транспортные пакеты скрепляют двумя полосами стальной упаковочной ленты по ГОСТ 3560, полипропиленовой лентой или тканой синтетической лентой, стальной проволокой по ГОСТ 3282.

Масса пакета - не более 1 т.

По согласованию с потребителем допускается поставка изделий без формирования транспортных пакетов.

При отгрузке изделий в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы маркировка и упаковка должны производиться с учетом указаний ГОСТ 15846.

Требования охраны окружающей среды

Изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Срок службы

Гарантированный срок службы – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Средний срок службы - не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию .

Эксплуатация

Эксплуатировать при температуре от -5°C до +40°C, при относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий в упаковке осуществляется любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Изделия транспортируют железнодорожным транспортом в контейнерах по ГОСТ 20435 или ГОСТ 22225, или пакетированными в термоусадочную пленку.

В контейнерах тара должна быть уложена рядами с заполнением пустот прокладочным материалом.

Транспортирование речным транспортом проводится в контейнерах по ГОСТ 20435 или пакетами.

Транспортирование автомобильным транспортом проводится в картонных коробках и ящиках, на деревянных поддонах, скрепленных стрейч-пленкой, в бумажных пачках и мешках без упаковки их в деревянные ящики.

При транспортировании изделий в температурных условиях ниже минус 30°C не допускается воздействие сильных ударных нагрузок.

Погрузку, крепление и разгрузку изделий необходимо производить в соответствии с ГОСТ 12.3.009.

Продукцию хранят в крытых сухих складских помещениях при температуре от минус 5°C до плюс 30°C при относительной влажности воздуха до 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в условиях защиты от загрязнений и воздействия агрессивных сред.

Тара с изделиями может штабелироваться по высоте не более чем в 6 рядов при строгом соблюдении вертикальности и устойчивости штабеля.

Изделие должно быть устойчиво к механическим воздействию для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

Изделие в транспортной упаковке должно быть устойчиво к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444, при транспортировании для условий 5 по ГОСТ 15150 и при хранении – условий хранения 1 по ГОСТ 15150.

Изделие в транспортной упаковке должно быть устойчиво к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании по ГОСТ Р 50444.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего руководства и при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения изделий - 12 месяцев.

Рекламации высылать на адрес:

ООО «Алан-Абрис», 440052, Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Богданова, д. 22.

Утилизация

Утилизация отходов – согласно СанПиН 2.1.7.1322-03, класс А.

При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.

Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772.

Допускается направлять отходы на повторную переработку (в согласованных случаях).

Допускается утилизацию отходов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.

Информация о техническом обслуживании и ремонте

Оправы должны ремонтироваться в специальных лабораториях, имеющих лицензию на производство, техническое обслуживание и ремонт.

Критерии непригодности

При приобретении оправы, прежде чем вскрыть упаковку, проверьте её целостность.

Внешний вид изделий:

- не должен иметь острых (режущих, колющих) кромок;

- не должен иметь дефекты, портящие товарный вид продукции;
- не должны иметь загрязнений;
- не должны иметь резкого или гнилостного запаха.

В случае выявления указанных выше критериев, обратитесь к производителю по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Алан-Абрис»

ООО «Алан-Абрис»

440052, Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Богданова, д. 22

8-499-681-19-89

Перечень расходных материалов и процедура их замены

Не содержит расходных материалов, которые могут подлежать замене.

Перечень нормативных документов

32.50.43-003-50562192-2021	Оправы для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлические по ТУ 32.50.43-003-50562192-2021, товарный знак GRESSO, в вариантах исполнения
ГОСТ 2.114-2016	ЕСКД. Технические условия
ГОСТ 2.601-2013	ЕСКД. Эксплуатационные документы
ГОСТ 9.301-86	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.313-89	ЕСЗКД. Покрытия металлические и неметаллические неорганические на пластмассах. Общие требования и технологические операции
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.0.004-2015	ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.018-93	ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.019-2017	ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.3.002-2014	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.030-83	ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности
ГОСТ 12.4.021-76	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.2.032-78	ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.033-78	ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.4.009-83	ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.028-76	ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия
ГОСТ 12.4.068-79	ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические.

ГОСТ 12.4.121-2015 ГОСТ 15.009-91	Классификация и общие требования ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления
ГОСТ 17.1.1.01-77	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения
ГОСТ 17.1.3.13-86	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.2.1.04-77	Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения
ГОСТ 17.2.3.02-2014	Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ ISO 10993-13-2016	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий
ГОСТ 3282-74	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
ГОСТ 3560-73	Лента стальная упаковочная. Технические условия
ГОСТ 33757-2016	Поддоны плоские деревянные. Технические условия
ГОСТ 10350-81	Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия
ГОСТ 33781-2016	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 16504-81	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 17811-78	Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия
ГОСТ 17308-88	Шпагаты. Технические условия
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 20435-75	Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия
ГОСТ 22225-76	Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия

ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 25951-83	Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
ГОСТ 31589-2012	Оптика офтальмологическая. Оправы корригирующих очков. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 54420-2011	Оптика офтальмологическая. Оправы очковые металлические и комбинированные. Методы имитации износа и определения выделения никеля
ГОСТ 12.4.253-2013	ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования
ГОСТ Р 50460-92	Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования
СП 60.13330.2016	Отопление, вентиляция и кондиционирование
СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
СанПиН 2.2.4.548-96	Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
ГН 2.2.5.3532-18	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Инструкция № 880-71	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами
СП 2.2.21327-03	Санитарные правила. Гигиенические требования к организации техпроцессов производственного оборудования и рабочему инструменту
ГН 2.1.6.3492-17	Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
МУ 2.1.7.730-99	Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест
СН 2.2.4/2.18.562-96	Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий
ТР ТС 005/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»

Сведения о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «Алан-Абрис»

ООО «Алан-Абрис»

440052, Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Богданова, д. 22

8-499-681-19-89


Регистрационный статус

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

№ XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX года.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Essex

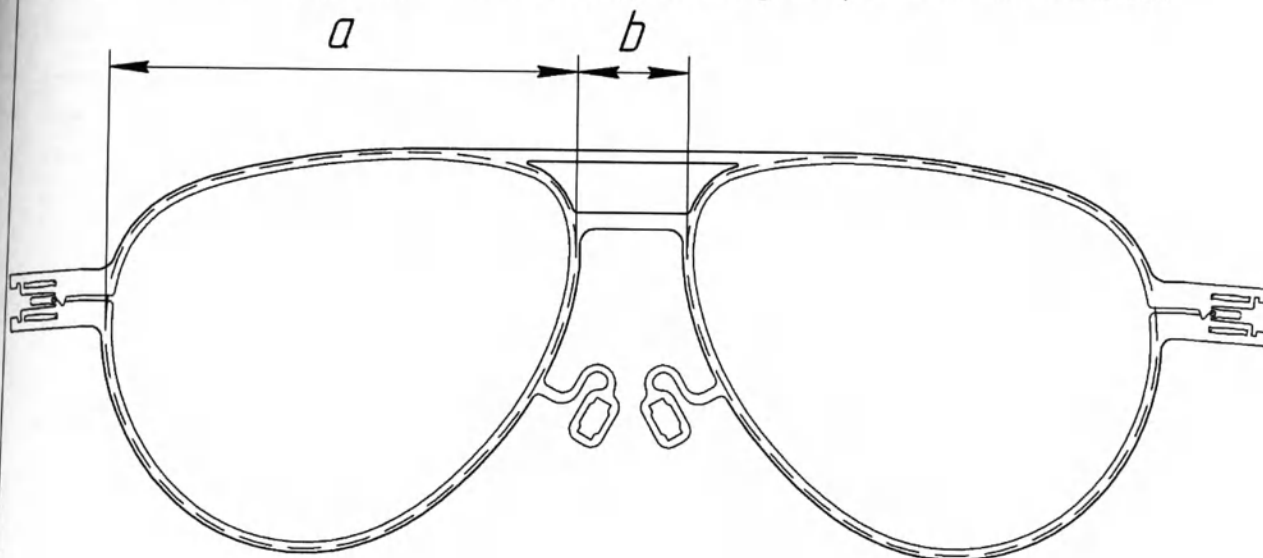

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	58	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	58	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	58	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	58	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
5	58	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
6	58	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
7	60	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	60	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	60	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	60	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
11	60	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
12	60	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
13	56	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	56	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	56	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	56	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
17	56	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
18	56	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
19	55	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	55	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	55	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	55	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
23	55	13	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
24	55	13	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
25	57	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	57	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
27	57	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	57	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
29	57	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
30	57	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
31	57	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	57	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	57	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	57	13	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
35	57	13	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
36	57	13	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Cleveland

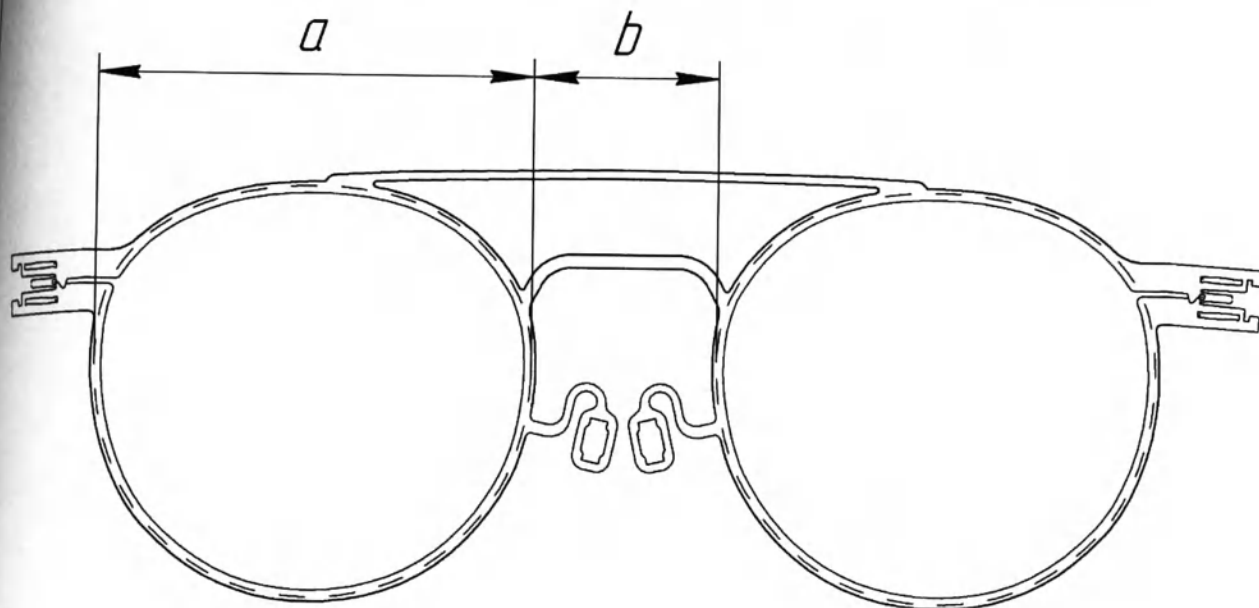

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	50	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	50	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	50	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	50	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
5	50	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
6	50	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
7	52	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	52	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	52	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	52	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
11	52	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
12	52	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
13	54	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	54	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	54	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	54	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
17	54	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
18	54	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
19	57	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	57	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	57	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
22	57	23	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
23	57	23	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
24	57	23	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
25	55	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	55	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	55	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	55	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	55	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	55	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	53	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	53	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	53	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	53	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	53	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	53	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Philadelphia

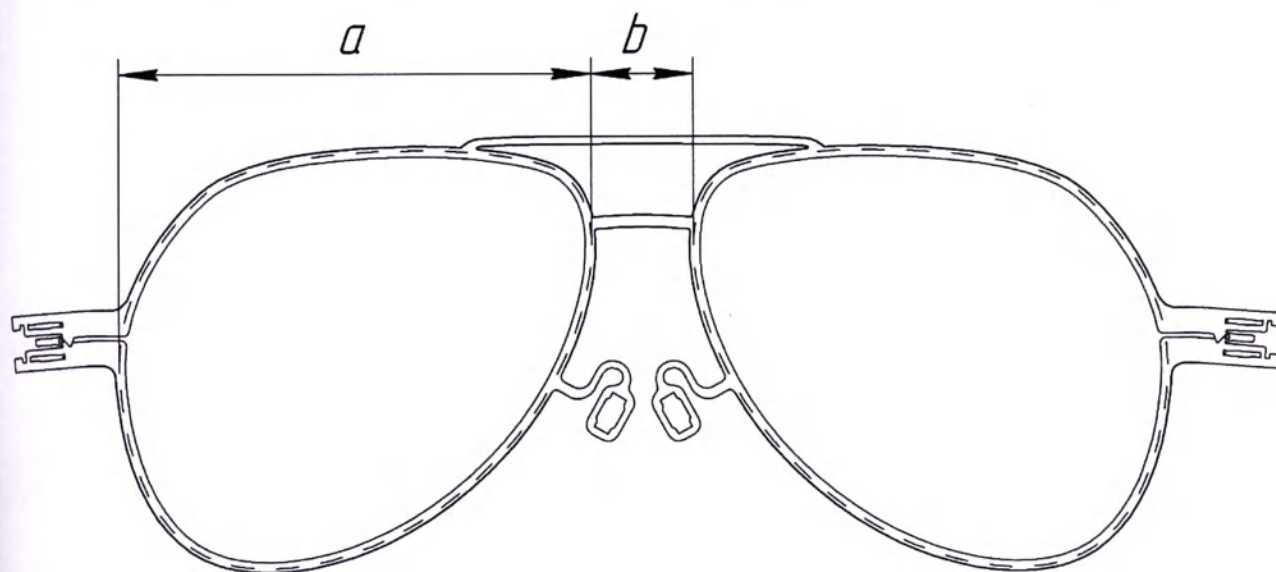

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	60	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	60	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	60	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	60	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
5	60	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
6	60	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
7	57	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	57	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	57	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	57	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
11	57	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
12	57	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
13	55	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	55	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	55	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	55	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
17	55	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
18	55	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
19	60	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	60	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	60	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	60	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
23	60	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
24	60	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
25	57	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
26	57	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
27	57	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	57	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	57	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	57	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	55	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	55	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	55	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	55	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	55	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	55	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Aspen

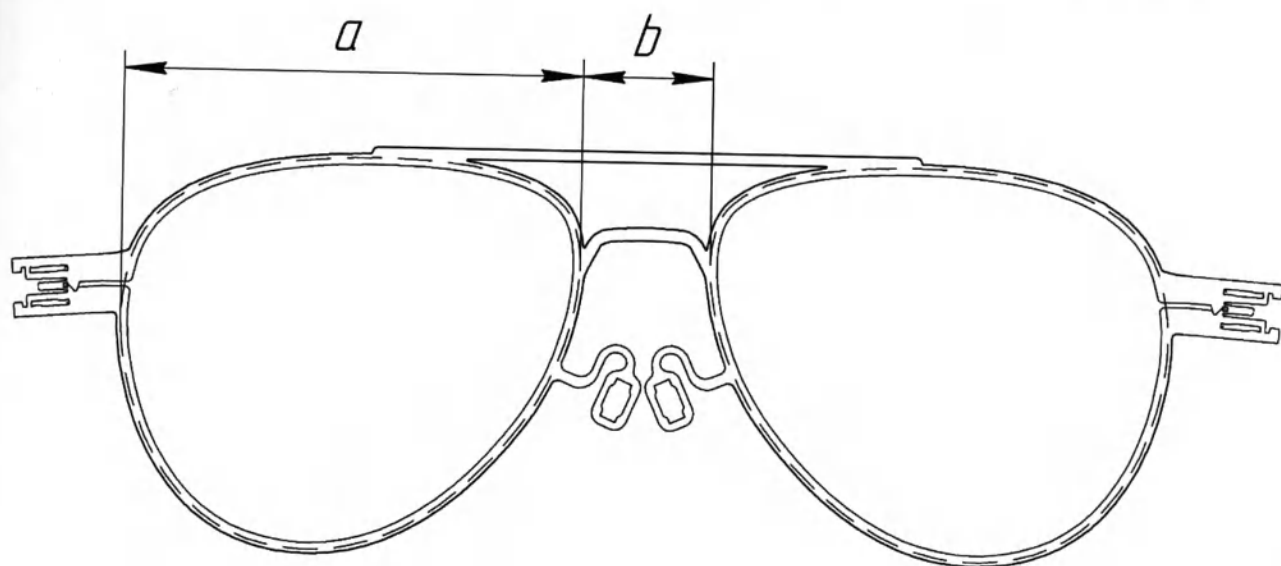

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
4	55	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
5	55	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
6	55	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
7	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	53	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
11	53	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
12	53	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
13	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	57	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
17	57	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
18	57	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
19	59	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	59	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	59	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	59	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
23	59	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
24	59	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
25	60	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	60	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
27	60	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	60	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
29	60	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
30	60	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
31	56	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	56	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	56	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	56	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
35	56	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
36	56	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Lexington

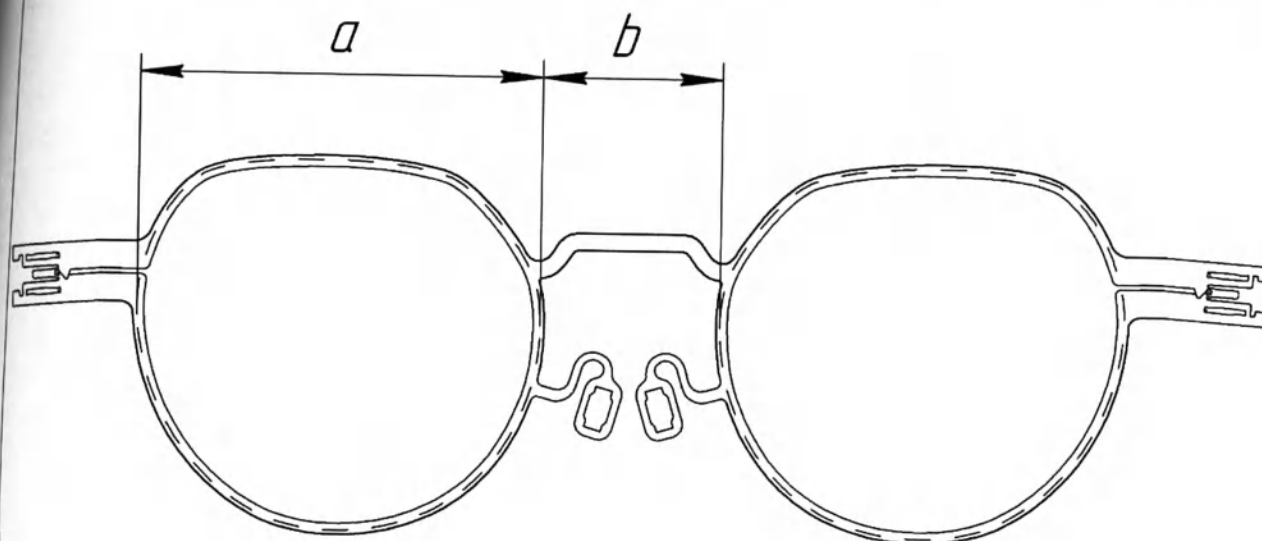

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	47	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	47	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	47	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	47	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
5	47	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
6	47	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
7	50	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	50	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	50	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	50	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
11	50	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
12	50	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
13	53	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	53	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	53	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	53	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
17	53	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
18	53	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
19	56	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	56	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	56	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	56	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
23	56	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
24	56	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
25	50	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
26	50	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	50	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	50	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	50	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	50	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	53	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	53	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	53	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	53	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	53	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	53	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Lincoln

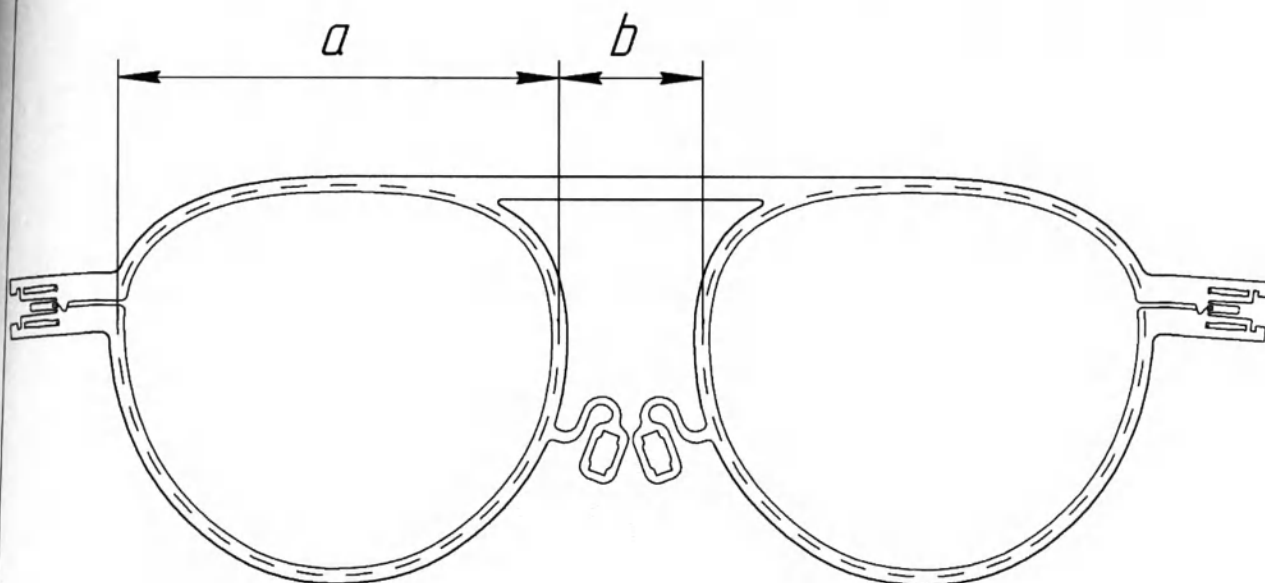

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	52	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	52	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	52	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	52	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
5	52	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
6	52	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
7	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	55	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
11	55	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
12	55	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
13	58	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	58	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	58	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	58	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
17	58	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
18	58	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
19	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	52	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
23	52	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
24	52	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
25	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
26	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	58	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	58	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	58	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	58	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	58	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	58	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Sacramento

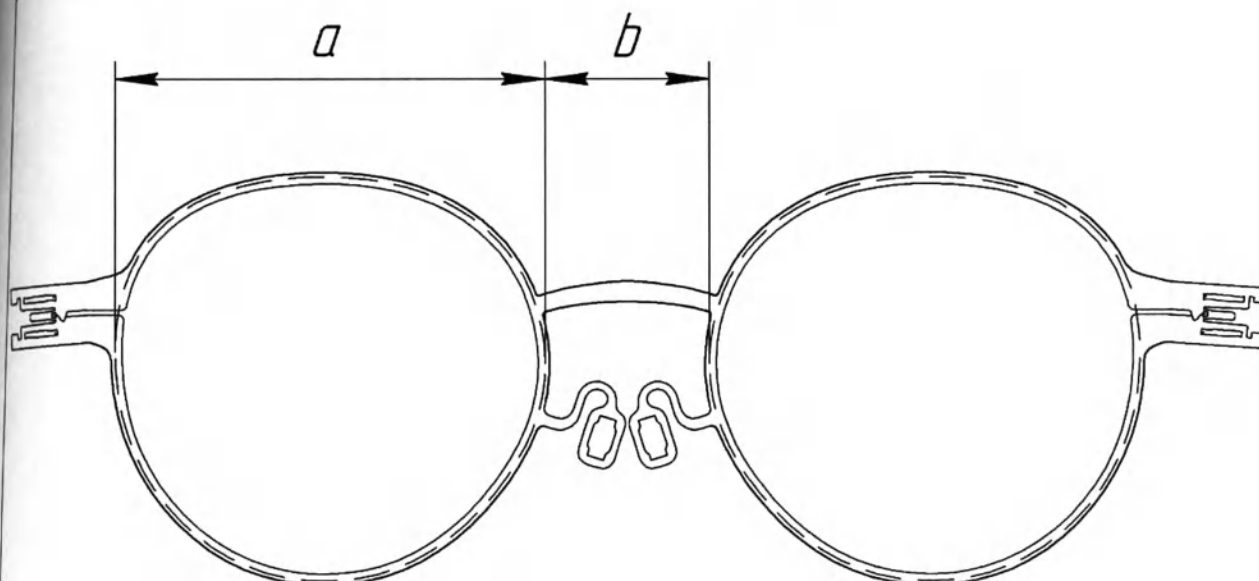

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
5	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
6	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
7	53	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	53	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	53	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	53	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
11	53	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
12	53	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
13	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	55	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
17	55	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
18	55	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
19	54	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	54	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	54	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	54	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
23	54	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
24	54	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
25	57	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
26	57	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	57	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	57	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	57	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	57	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	51	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	51	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	51	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	51	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	51	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	51	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Riverside

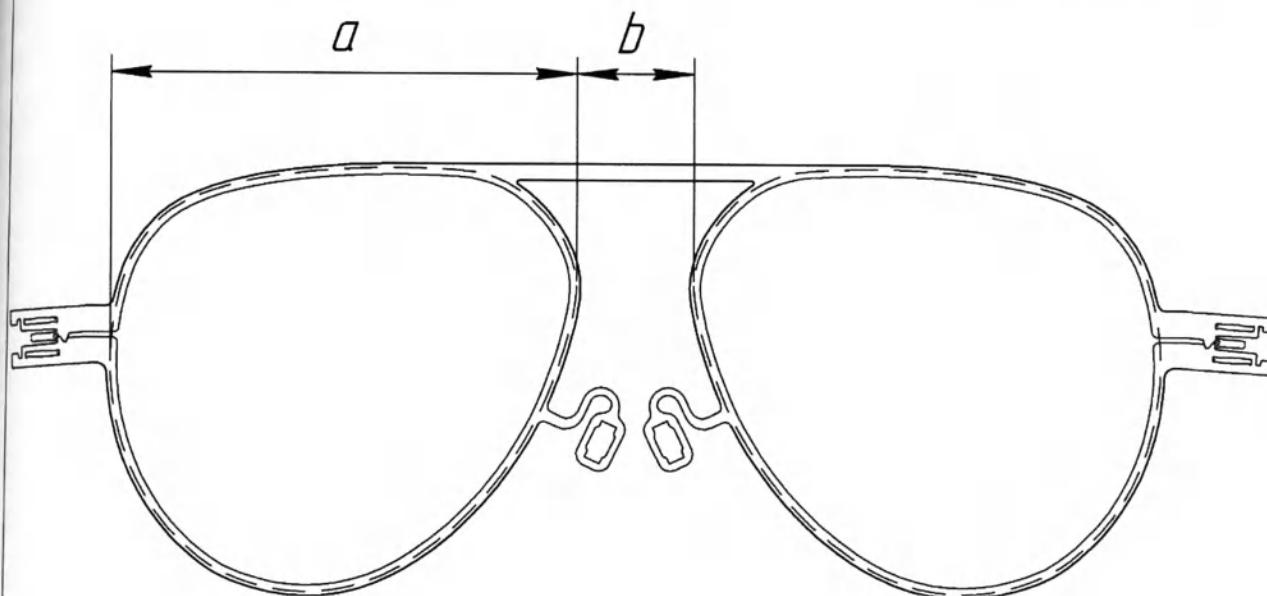

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	57	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	57	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	57	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	57	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
5	57	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
6	57	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
7	60	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	60	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	60	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	60	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
11	60	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
12	60	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
13	55	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	55	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	55	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	55	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
17	55	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
18	55	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
19	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	55	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
23	55	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
24	55	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
25	58	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	58	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
27	58	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	58	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	58	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	58	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	53	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	53	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	53	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	53	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	53	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	53	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Charlotte

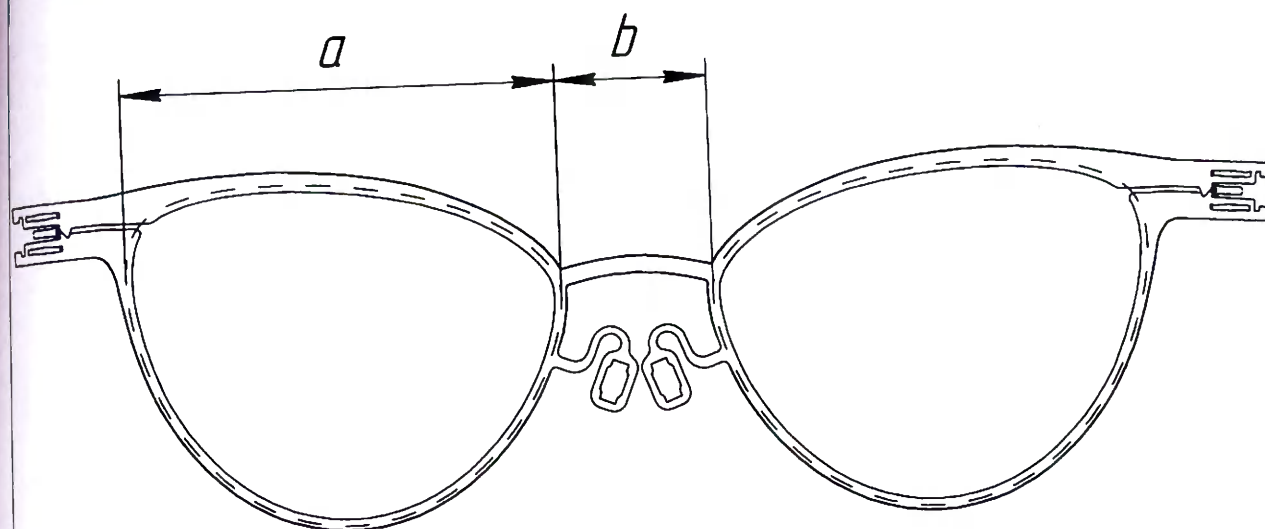

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	52	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
5	52	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
6	52	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
7	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	55	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
11	55	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
12	55	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
13	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	50	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
17	50	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
18	50	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
19	53	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	53	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	53	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	53	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
23	53	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
24	53	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
25	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	50	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	50	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	50	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	50	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	50	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	50	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
37	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
38	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
39	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
40	54	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
41	54	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
42	54	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
43	57	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
44	57	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
45	57	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
46	57	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
47	57	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
48	57	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
49	58	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
50	58	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
51	58	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
52	58	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
53	58	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
54	58	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
55	53	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
56	50	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
57	50	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
58	50	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
59	50	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
60	50	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Auroga

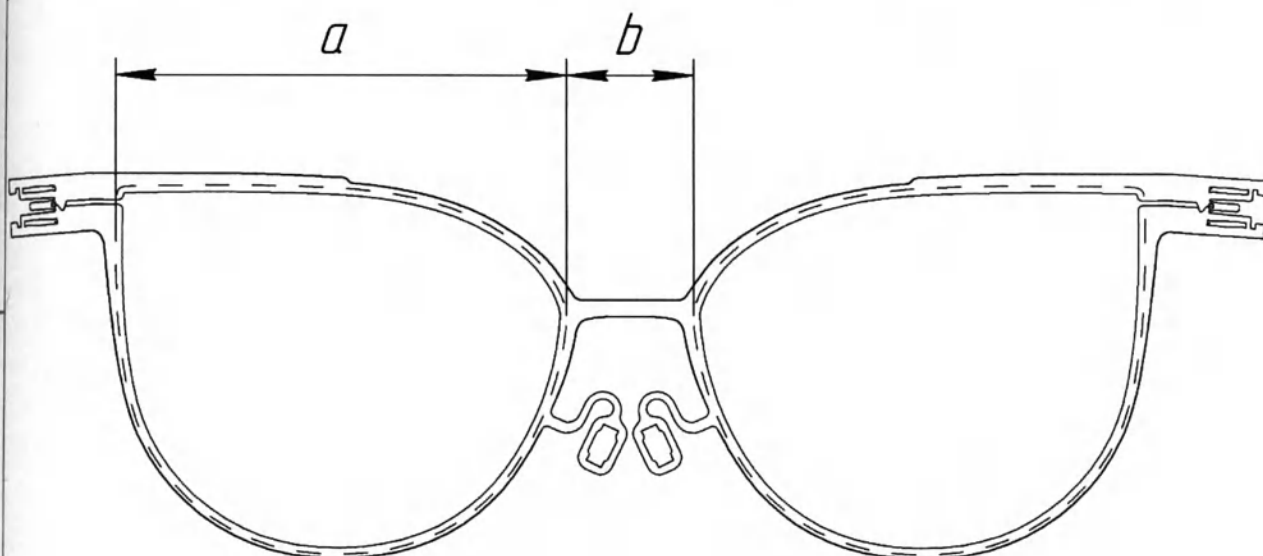

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	55	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
5	55	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
6	55	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
7	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	55	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
11	55	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
12	55	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
13	52	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	52	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	52	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	52	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
17	52	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
18	52	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
19	58	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	58	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	58	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	58	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
23	58	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
24	58	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
25	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
26	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
27	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	53	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	53	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	53	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Helena

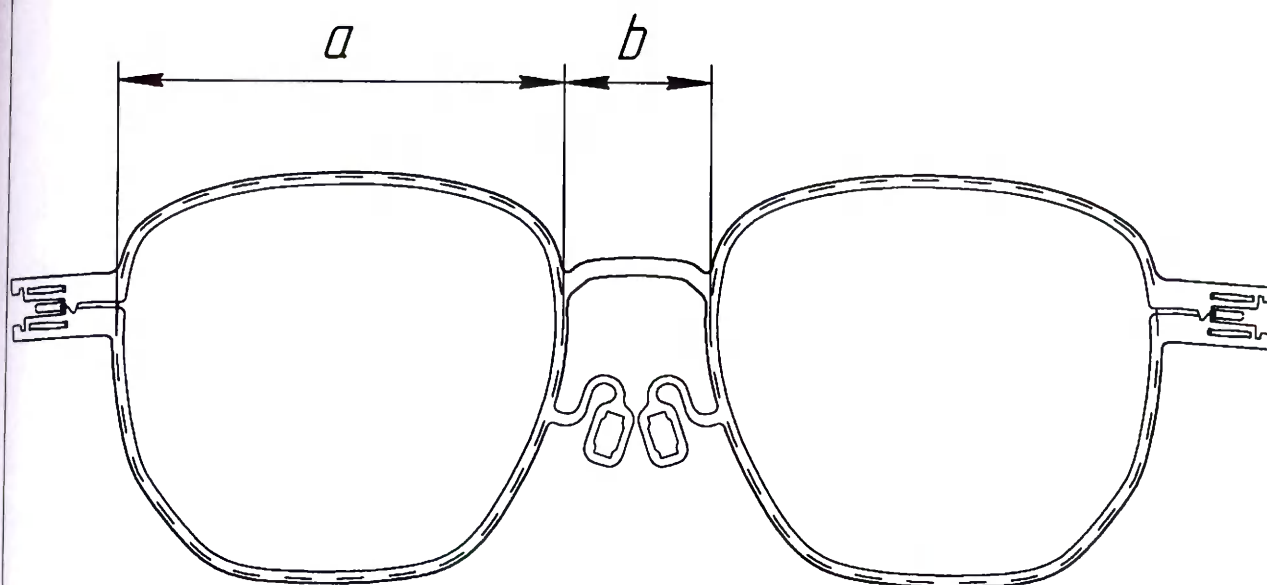

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	50	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
5	50	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
6	50	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
7	52	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	52	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	52	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	52	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
11	52	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
12	52	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
13	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
17	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
18	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
19	57	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	57	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	57	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	57	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
23	57	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
24	57	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
25	59	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
26	59	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	59	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	59	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	59	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	59	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Victoria

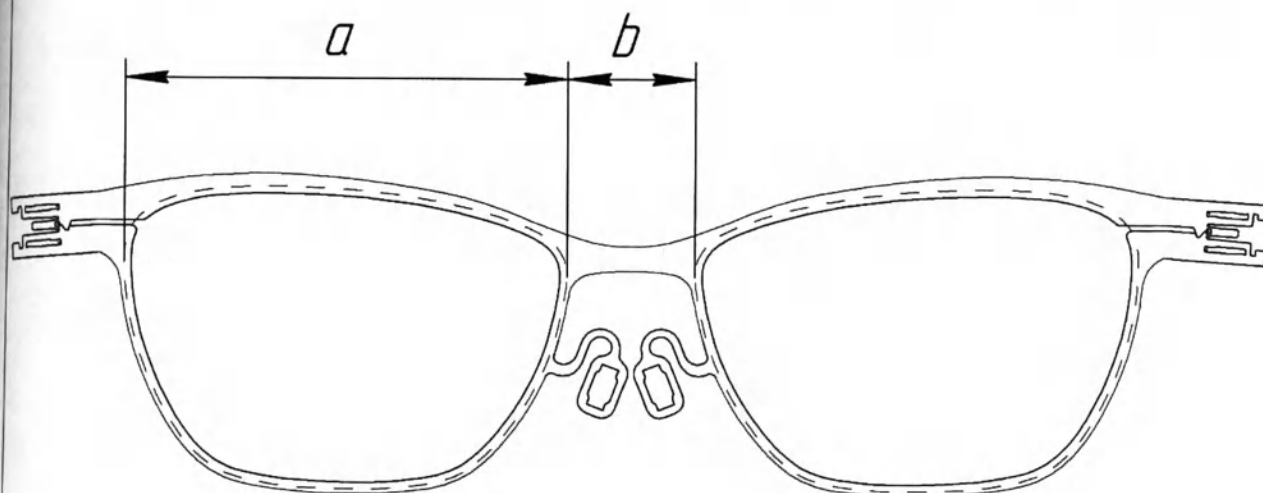

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	51	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
2	51	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
3	51	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
4	51	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
5	51	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
6	51	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный
7	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
8	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
9	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
10	53	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
11	53	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
12	53	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный
13	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
14	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
15	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
16	55	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
17	55	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
18	55	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный
19	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
20	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
21	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
22	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
23	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
24	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный
25	59	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
26	59	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
27	59	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
28	59	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
29	59	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
30	59	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный
31	49	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
32	49	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
33	49	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
34	49	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
35	49	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
36	49	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Havaana

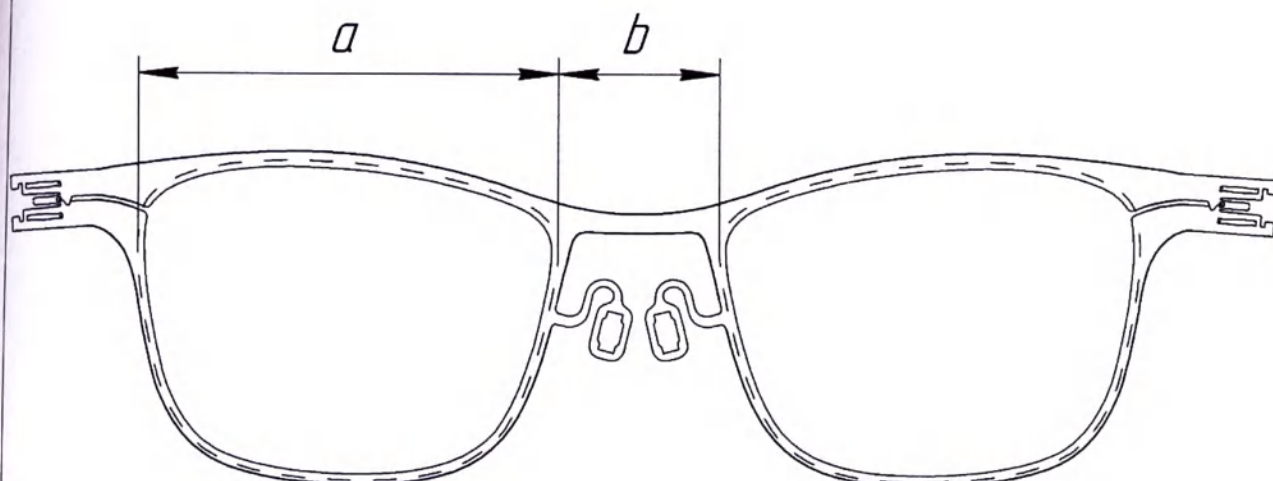

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	52	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
2	52	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
3	52	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
4	52	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Без цвета
5	52	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Золото
6	52	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Чёрный
7	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
8	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
9	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
10	55	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Без цвета
11	55	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Золото
12	55	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Чёрный
13	58	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
14	58	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
15	58	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
16	58	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Без цвета
17	58	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Золото
18	58	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Чёрный
19	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
20	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
21	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
22	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Без цвета
23	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Золото
24	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	7	Чёрный
25	55	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
26	55	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
27	55	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
28	55	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
29	55	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
30	55	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный
31	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
32	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
33	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
34	50	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
35	50	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
36	50	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Catalina

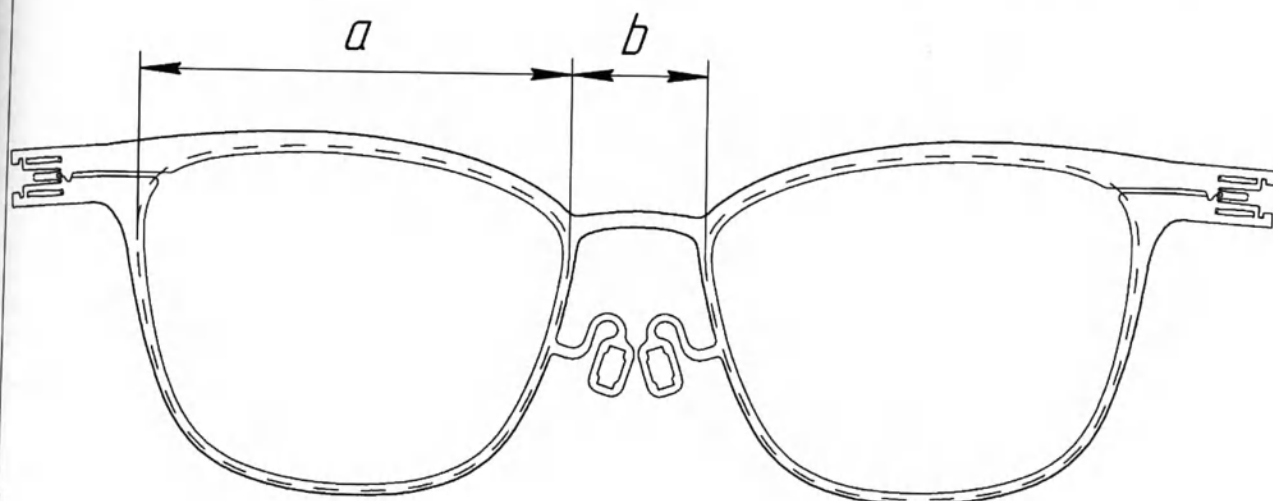

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	53	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
2	53	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
3	53	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
4	53	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
5	53	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
6	53	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный
7	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
8	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
9	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
10	50	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
11	50	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
12	50	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный
13	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
14	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
15	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
16	55	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
17	55	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
18	55	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный
19	57	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
20	57	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
21	57	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
22	57	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
23	57	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
24	57	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный
25	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
26	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
27	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
28	51	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
29	51	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
30	51	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный
31	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Без цвета
32	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Золото
33	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
34	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Без цвета
35	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Золото
36	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	7	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Georgia

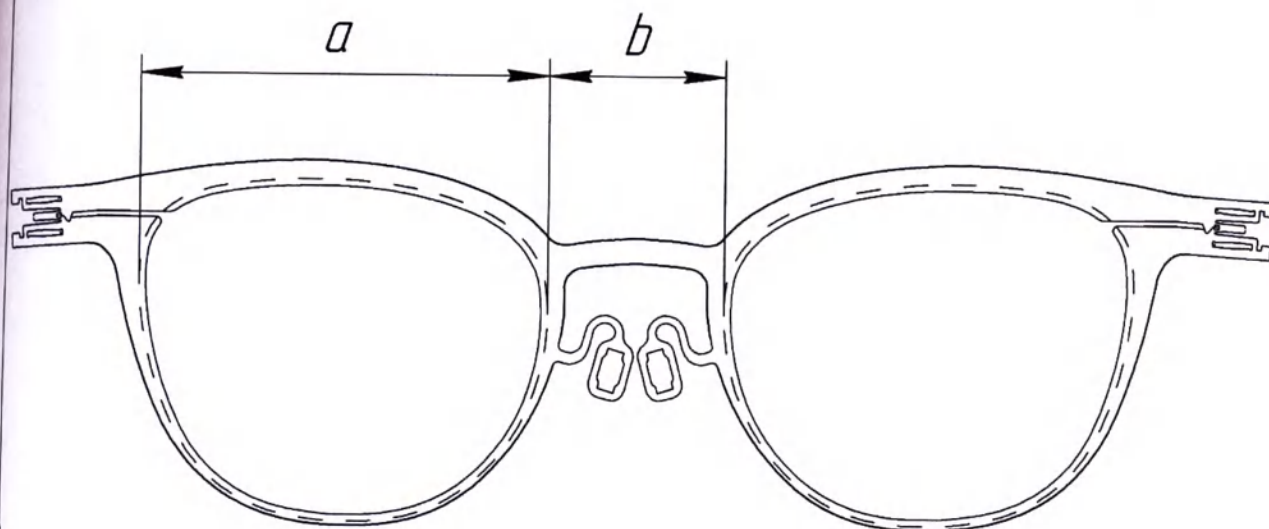

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	49	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	49	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	49	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	49	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
5	49	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
6	49	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
7	47	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	47	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	47	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	47	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
11	47	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
12	47	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
13	51	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	51	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	51	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	51	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
17	51	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
18	51	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
19	53	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	53	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	53	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	53	23	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
23	53	23	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
24	53	23	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
25	55	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	55	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	55	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	55	23	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	55	23	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	55	23	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	50	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	50	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	50	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Sierra

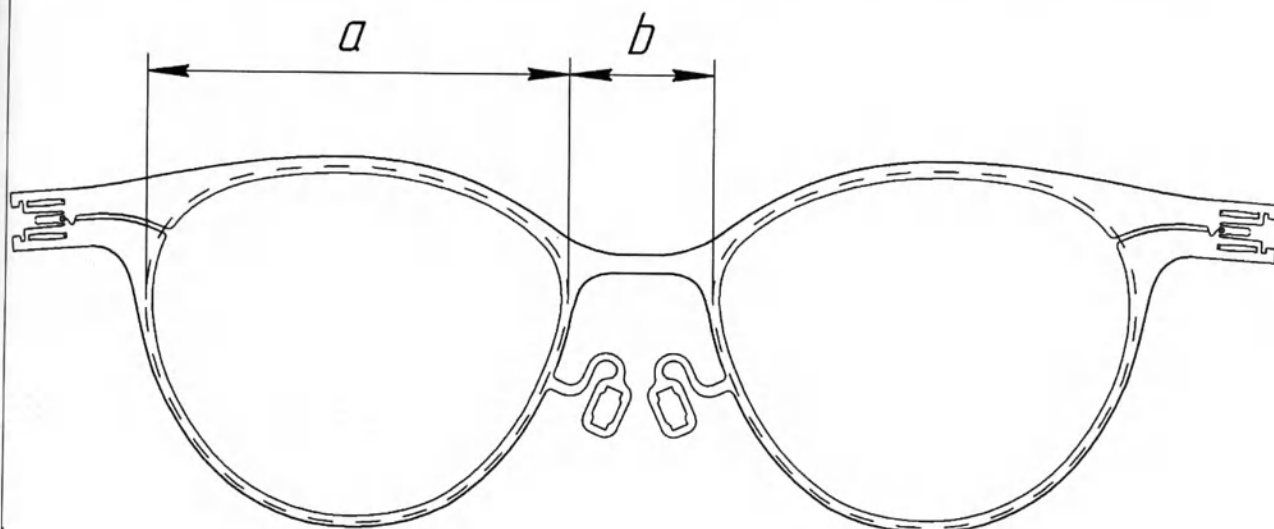

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	51	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
5	51	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
6	51	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
7	51	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	51	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	51	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	51	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
11	51	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
12	51	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
13	48	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	48	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	48	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	48	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
17	48	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
18	48	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
19	54	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	54	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	54	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	54	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
23	54	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
24	54	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
25	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	54	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	54	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	54	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	52	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	52	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	52	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Carmel

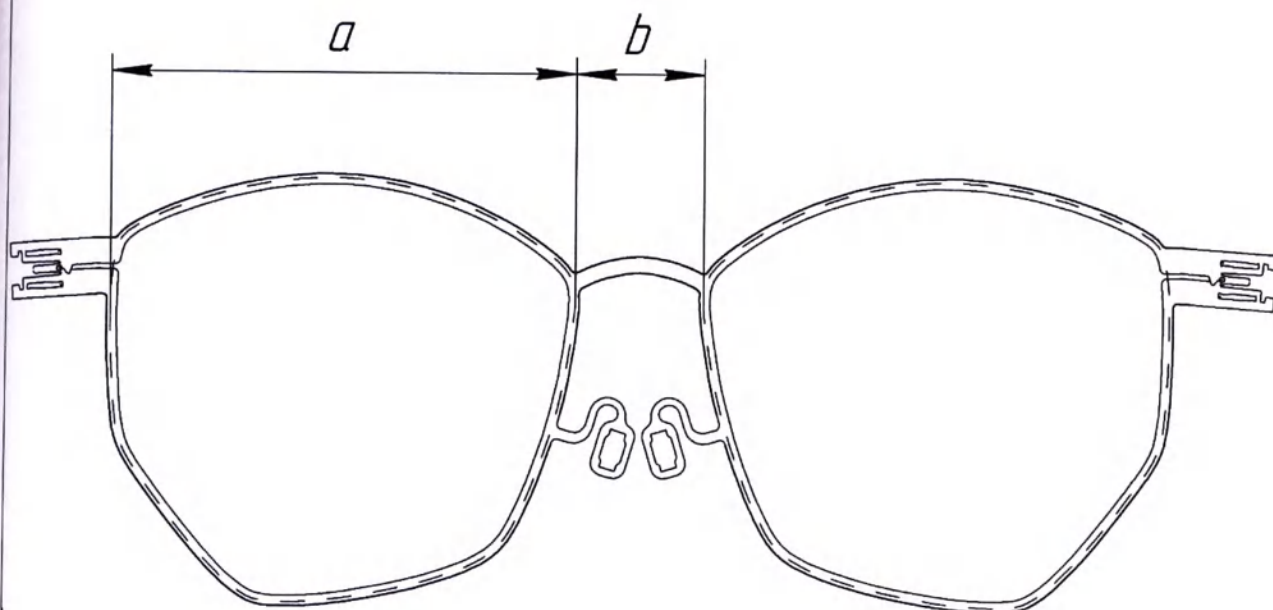

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	58	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	58	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	58	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	58	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
5	58	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
6	58	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
7	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
11	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
12	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
13	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	55	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
17	55	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
18	55	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
19	60	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	60	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	60	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	60	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
23	60	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
24	60	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
25	56	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	56	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	56	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	56	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	56	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	56	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	59	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	59	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	59	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	59	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	59	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	59	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Alberta

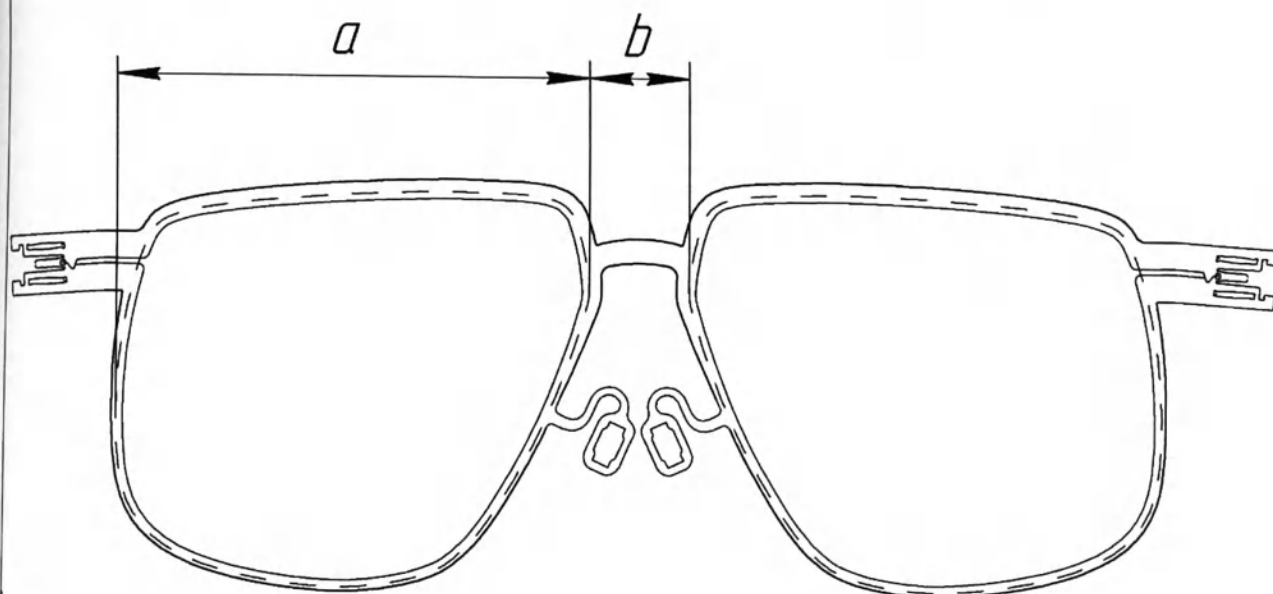

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	55	11	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	55	11	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	55	11	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	55	11	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
5	55	11	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
6	55	11	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
7	55	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	55	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	55	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	55	12	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
11	55	12	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
12	55	12	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
13	58	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	58	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	58	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	58	12	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
17	58	12	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
18	58	12	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
19	60	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	60	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	60	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	60	13	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
23	60	13	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
24	60	13	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
25	57	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
26	57	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	57	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	57	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	57	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	57	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	58	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	58	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	58	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	58	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	58	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	58	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Houston

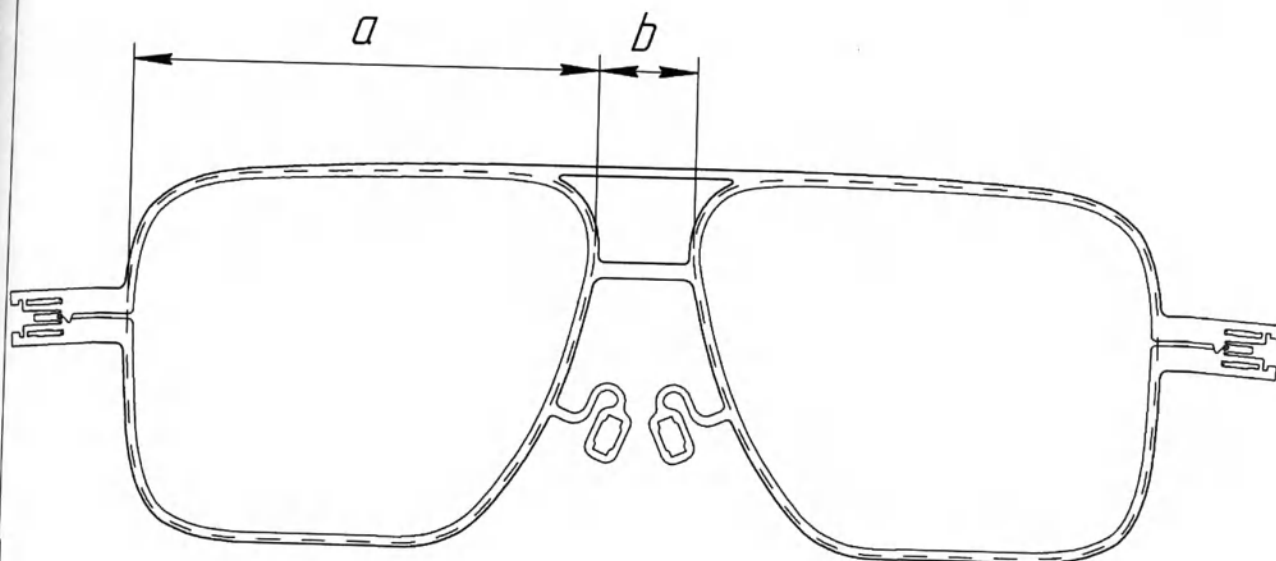

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	60	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	60	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	60	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	60	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
5	60	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
6	60	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
7	59	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	59	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	59	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	59	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
11	59	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
12	59	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
13	58	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	58	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	58	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	58	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
17	58	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
18	58	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
19	55	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	55	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	55	12	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	55	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
23	55	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
24	55	12	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
25	58	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	58	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	58	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	58	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	58	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	58	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	55	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	55	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	55	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	55	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	55	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	55	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Columbus

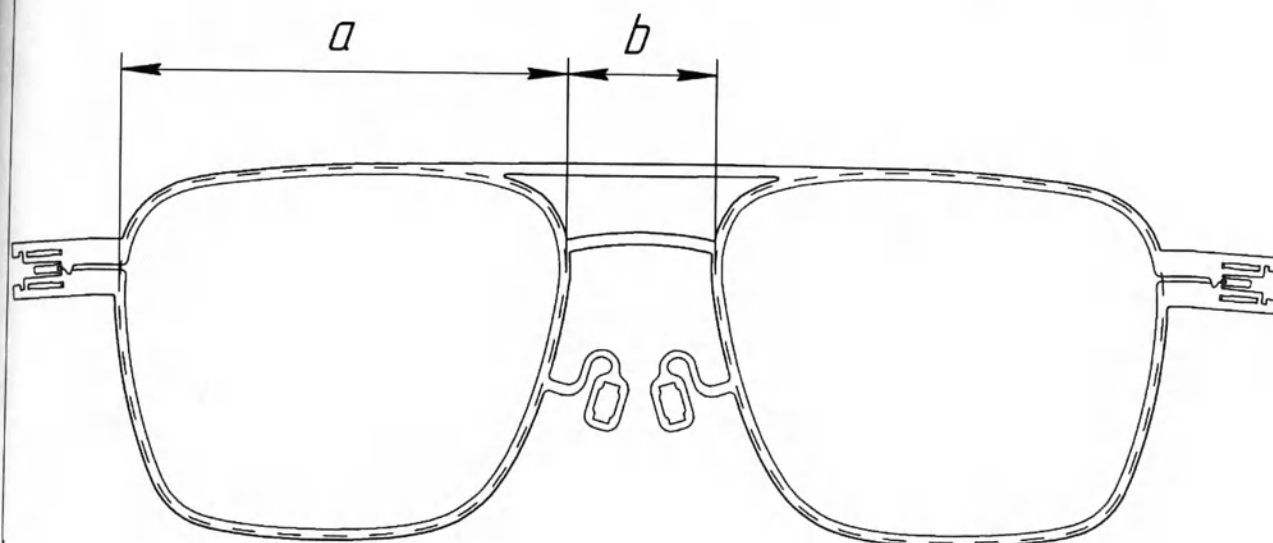

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
5	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
6	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
7	58	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	58	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	58	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	58	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
11	58	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
12	58	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
13	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
17	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
18	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
19	53	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	53	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	53	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	53	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
23	53	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
24	53	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
25	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	51	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	51	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	51	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	54	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	54	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	54	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	54	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	54	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	54	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Denver

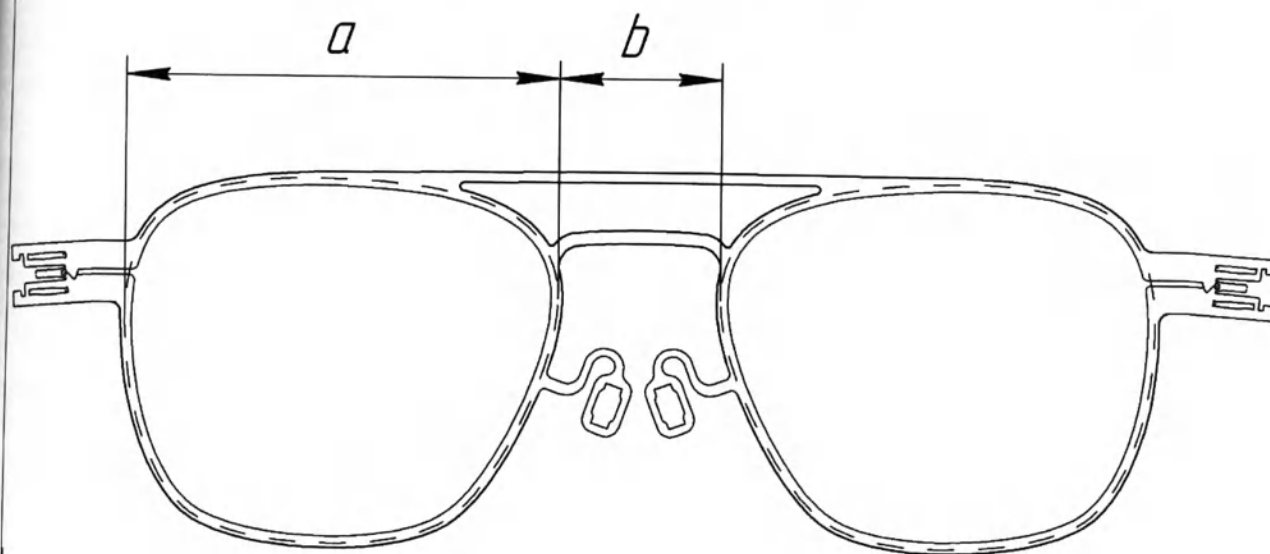

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	50	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
5	50	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
6	50	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
7	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	52	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
11	52	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
12	52	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
13	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
17	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
18	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
19	56	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	56	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	56	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	56	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
23	56	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
24	56	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
25	58	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	58	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	58	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	58	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	58	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	58	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	56	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	56	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	56	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	56	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	56	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	56	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Henderson

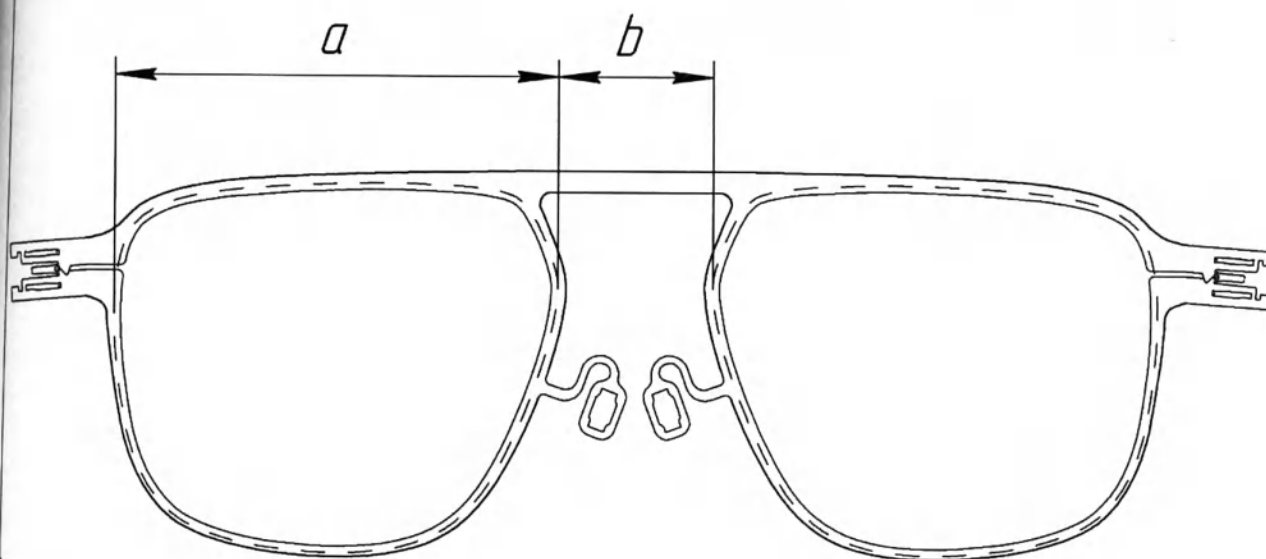

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	54	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
5	54	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
6	54	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
7	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
11	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
12	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
13	58	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	58	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	58	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	58	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
17	58	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
18	58	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
19	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	52	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
23	52	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
24	52	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
25	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
26	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	53	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	53	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	53	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	53	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	53	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	53	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Turin

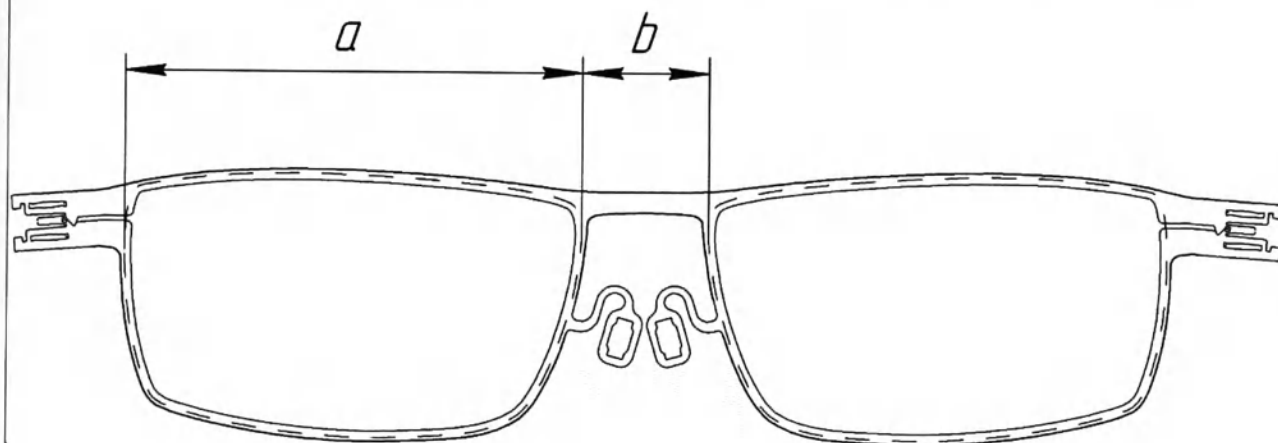

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	57	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
5	57	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
6	57	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
7	59	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	59	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	59	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	59	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
11	59	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
12	59	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
13	60	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	60	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	60	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	60	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
17	60	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
18	60	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
19	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	55	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
23	55	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
24	55	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
25	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	53	15	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
29	53	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	53	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	55	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	55	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	55	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	55	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корригирующих (для коррекции зрения) металлическая Buffalo

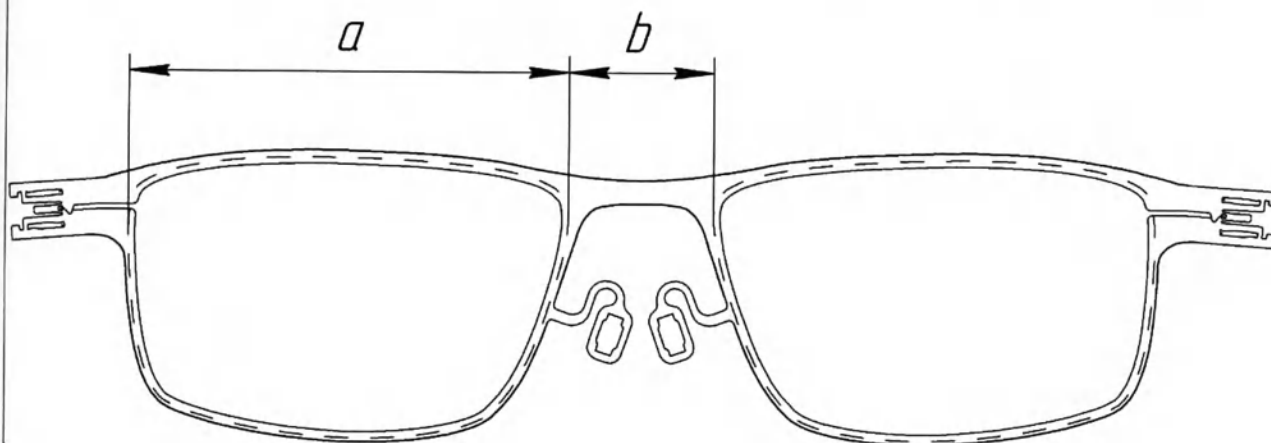

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
5	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
6	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
7	57	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	57	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	57	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	57	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
11	57	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
12	57	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
13	59	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	59	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	59	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	59	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
17	59	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
18	59	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
19	53	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	53	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	53	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	53	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
23	53	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
24	53	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
25	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	51	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
29	51	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	51	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	55	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	55	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	55	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Scottsdale

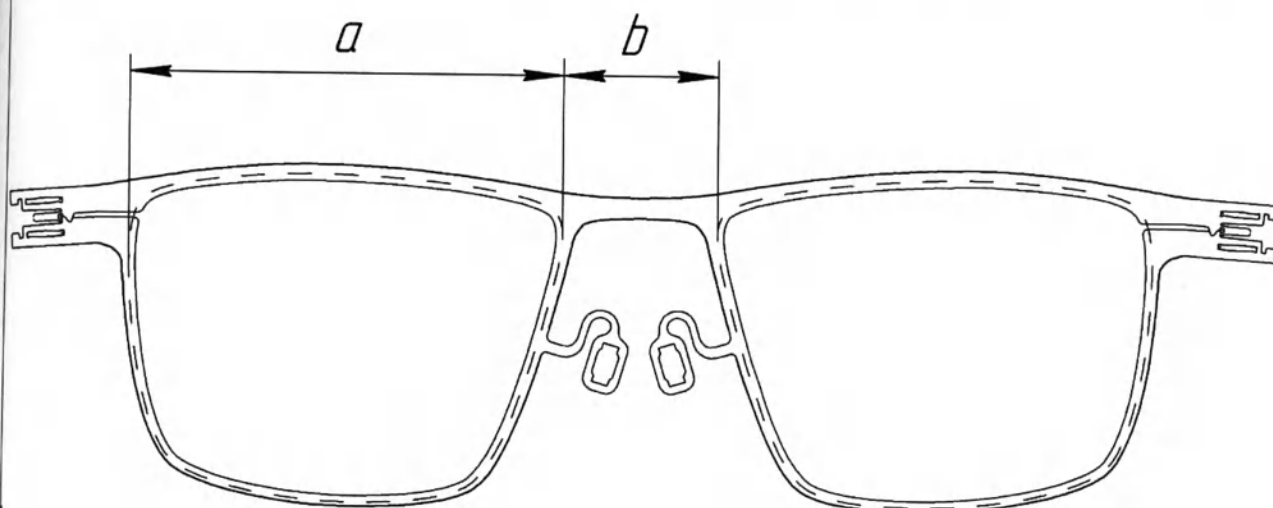

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	53	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	53	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	53	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	53	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
5	53	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
6	53	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
7	51	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	51	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	51	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	51	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
11	51	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
12	51	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
13	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
17	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
18	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
19	57	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	57	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	57	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	57	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
23	57	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
24	57	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
25	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
29	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	50	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	50	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	50	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	50	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	50	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	50	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Bristol

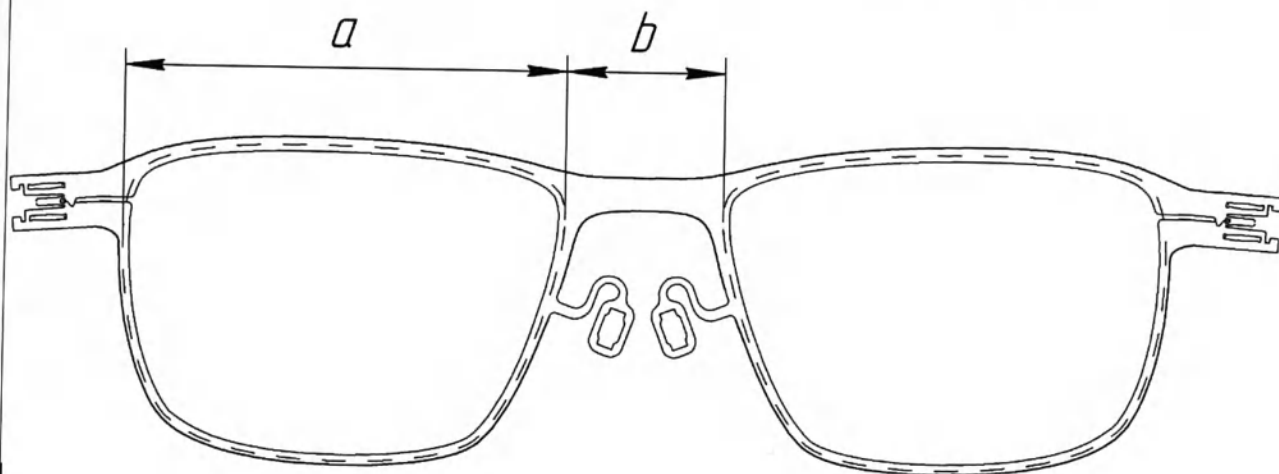

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	56	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	56	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	56	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	56	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
5	56	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
6	56	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
7	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	54	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
11	54	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
12	54	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
13	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	52	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
17	52	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
18	52	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
19	58	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	58	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	58	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	58	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
23	58	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
24	58	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
25	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	54	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
29	54	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	54	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	52	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	52	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	52	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Concord

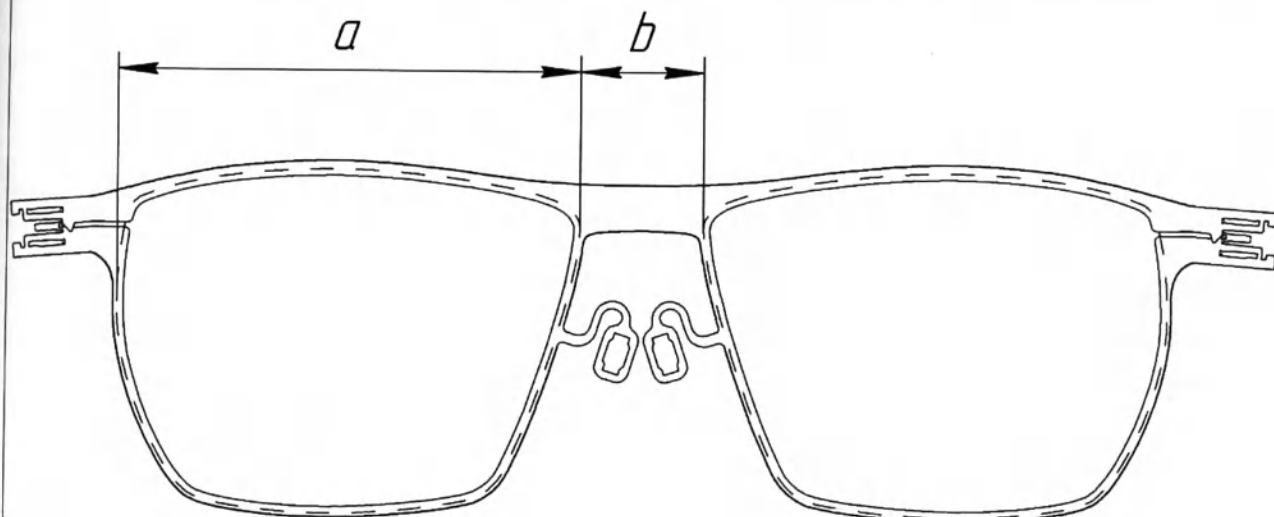

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	58	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	58	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	58	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	58	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
5	58	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
6	58	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
7	58	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	58	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	58	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	58	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
11	58	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
12	58	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
13	56	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	56	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	56	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	56	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
17	56	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
18	56	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
19	54	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	54	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	54	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	54	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
23	54	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
24	54	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
25	60	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	60	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	60	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
28	60	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	60	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	60	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	56	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	56	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	56	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	56	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	56	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	56	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Birmingham

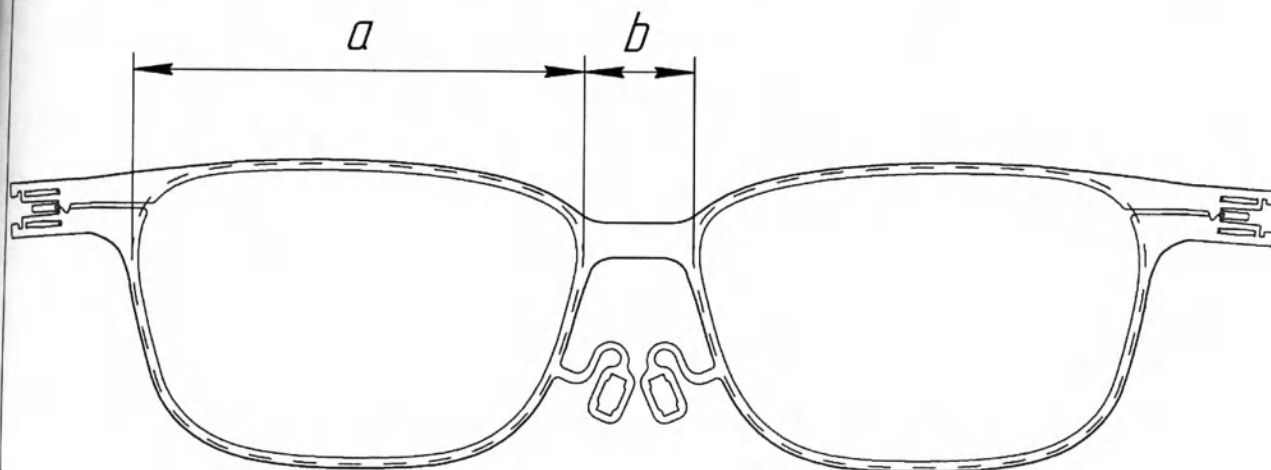

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	57	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
2	57	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
3	57	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
4	57	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
5	57	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
6	57	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
7	59	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
8	59	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
9	59	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
10	59	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
11	59	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
12	59	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
13	55	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
14	55	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
15	55	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
16	55	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
17	55	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
18	55	14	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
19	53	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
20	53	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
21	53	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
22	53	13	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Без цвета
23	53	13	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Золото
24	53	13	140	70	Титан: B-Titan 15333	8	Чёрный
25	51	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
26	51	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
27	51	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
28	51	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
29	51	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
30	51	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный
31	56	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Без цвета
32	56	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Золото
33	56	13	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	10	Чёрный
34	56	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Без цвета
35	56	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Золото
36	56	13	140	70	Титан: В-Titan 15333	8	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Bremen

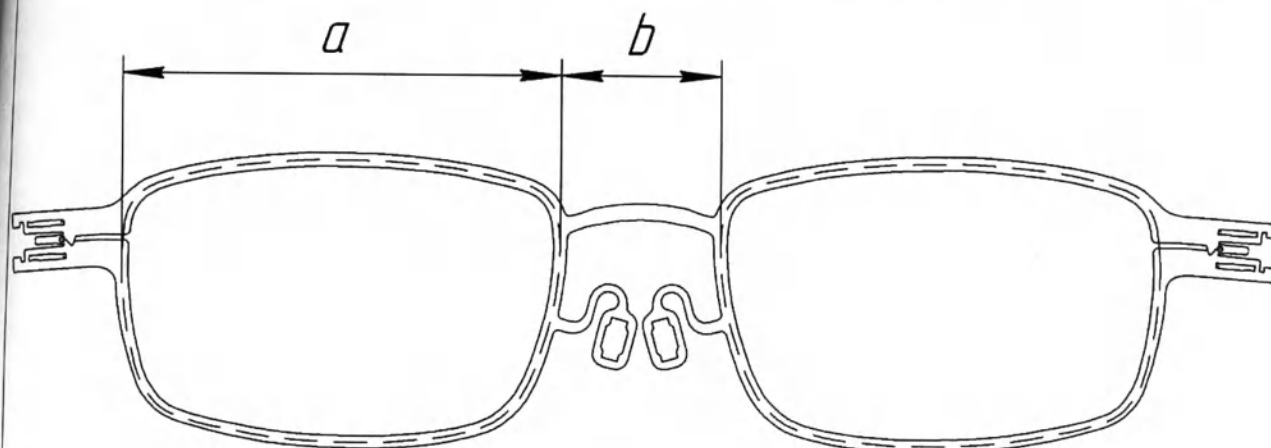

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	53	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	53	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	53	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	53	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
5	53	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
6	53	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
7	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
11	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
12	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
13	51	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	51	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	51	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	51	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
17	51	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
18	51	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
19	55	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	55	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	55	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	55	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
23	55	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
24	55	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
25	57	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	57	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
27	57	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	57	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
29	57	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
30	57	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Basel

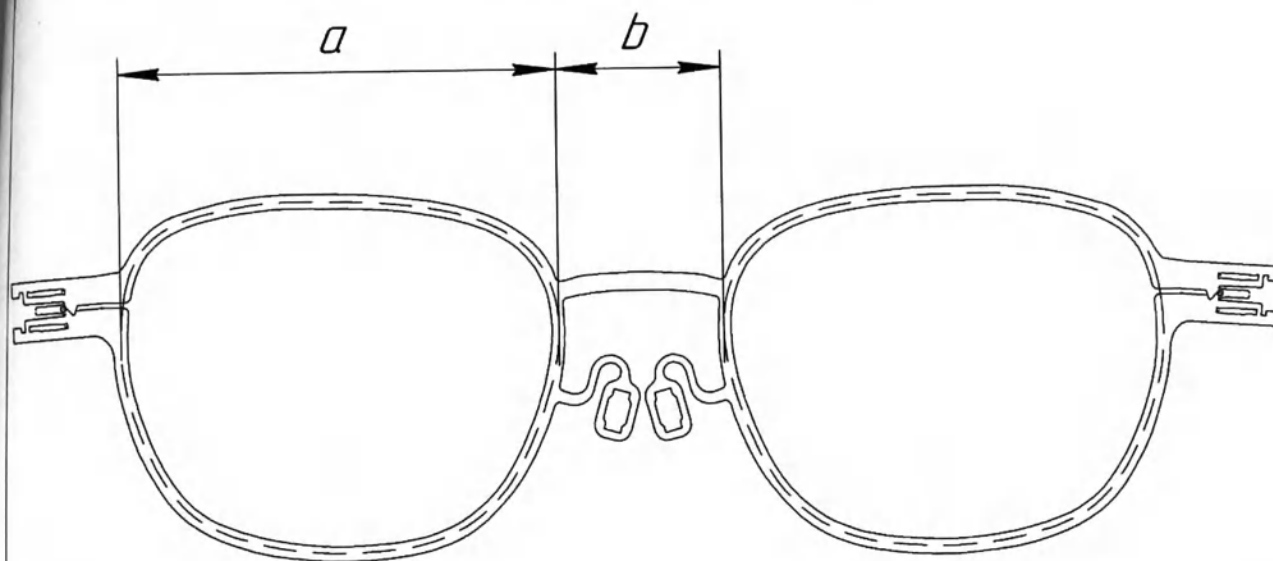

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	52	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
5	52	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
6	52	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
7	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	50	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
11	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
12	50	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
13	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	54	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
17	54	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
18	54	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
19	56	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	56	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	56	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	56	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
23	56	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
24	56	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
25	58	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	58	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	58	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	58	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	58	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	58	22	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	53	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	53	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	53	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	53	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	53	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	53	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Dublin

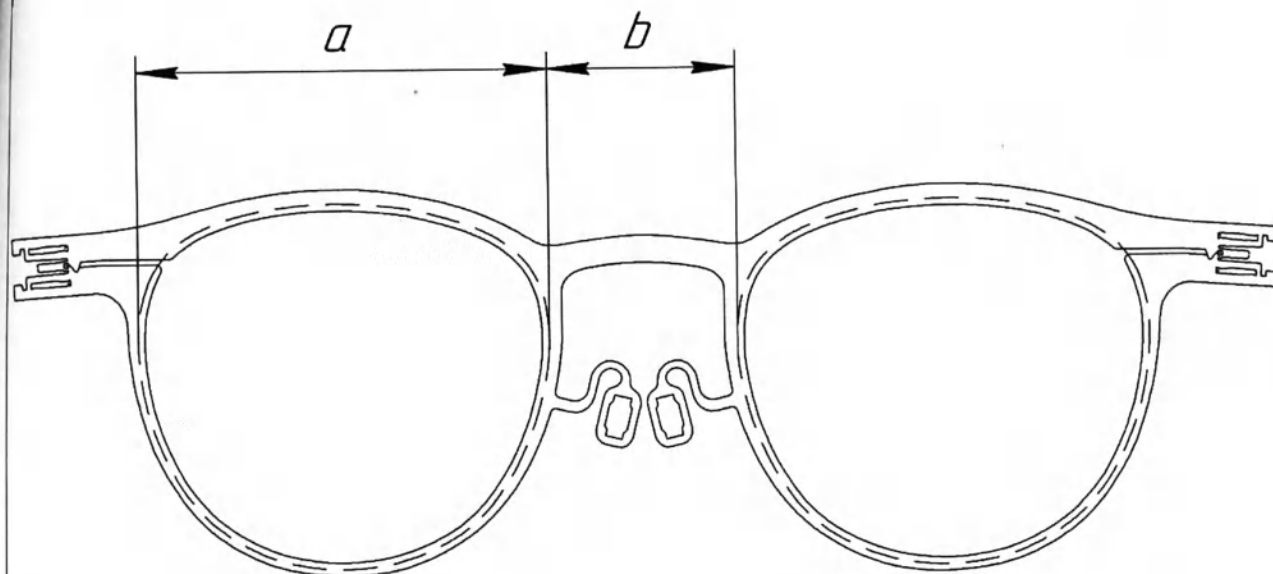

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	48	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	48	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	48	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	48	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
5	48	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
6	48	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
7	48	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	48	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	48	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	48	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
11	48	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
12	48	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
13	50	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	50	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	50	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	50	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
17	50	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
18	50	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
19	52	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	52	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	52	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	52	23	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
23	52	23	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
24	52	23	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
25	54	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	54	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	54	23	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	54	23	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	54	23	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	54	23	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	51	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	51	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	51	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	51	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	51	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	51	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
37	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
38	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
39	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
40	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	11	Чёрный
41	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
42	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
43	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
44	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
45	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
46	55	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	11	Чёрный
47	55	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
48	55	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
49	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
50	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
51	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
52	50	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	11	Чёрный
53	50	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
54	50	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
55	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	9	Чёрный
56	52	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
57	52	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
58	52	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	11	Чёрный
59	52	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
60	52	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Montreal

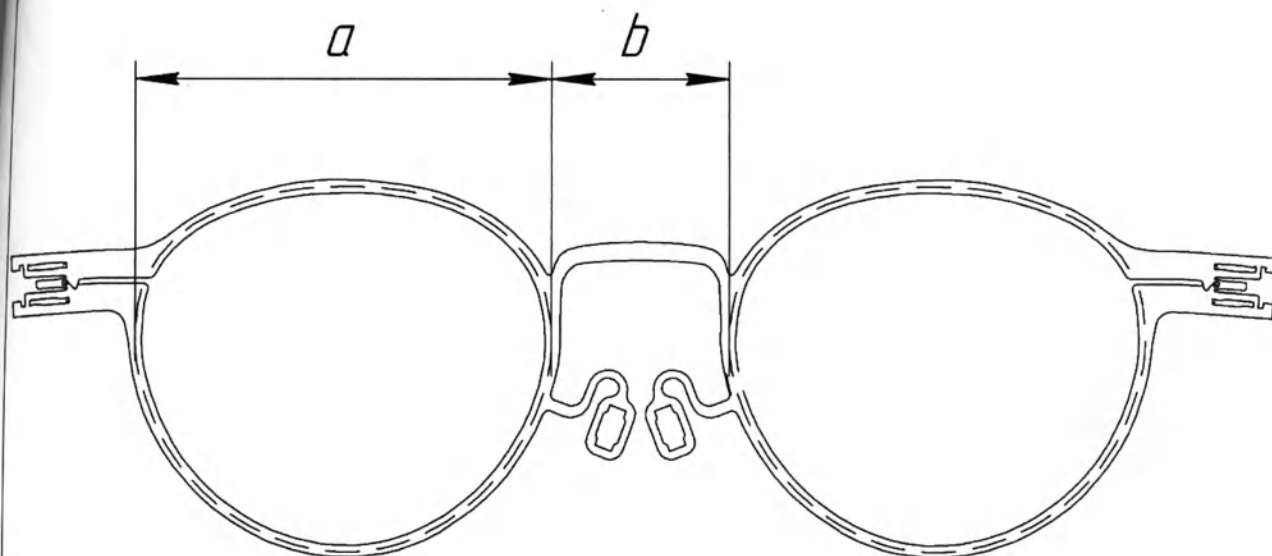

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	48	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	48	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	48	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	48	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
5	48	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
6	48	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
7	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	50	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	50	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
11	50	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
12	50	20	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
13	52	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	52	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	52	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	52	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
17	52	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
18	52	21	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
19	54	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	54	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	54	22	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	54	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
23	54	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
24	54	22	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
25	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	52	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	52	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	52	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	52	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	48	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	48	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	48	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	48	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	48	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	48	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
37	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
38	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
39	54	20	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
40	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
41	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
42	54	20	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
43	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
44	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
45	55	21	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
46	55	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
47	55	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
48	55	21	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Potsdam

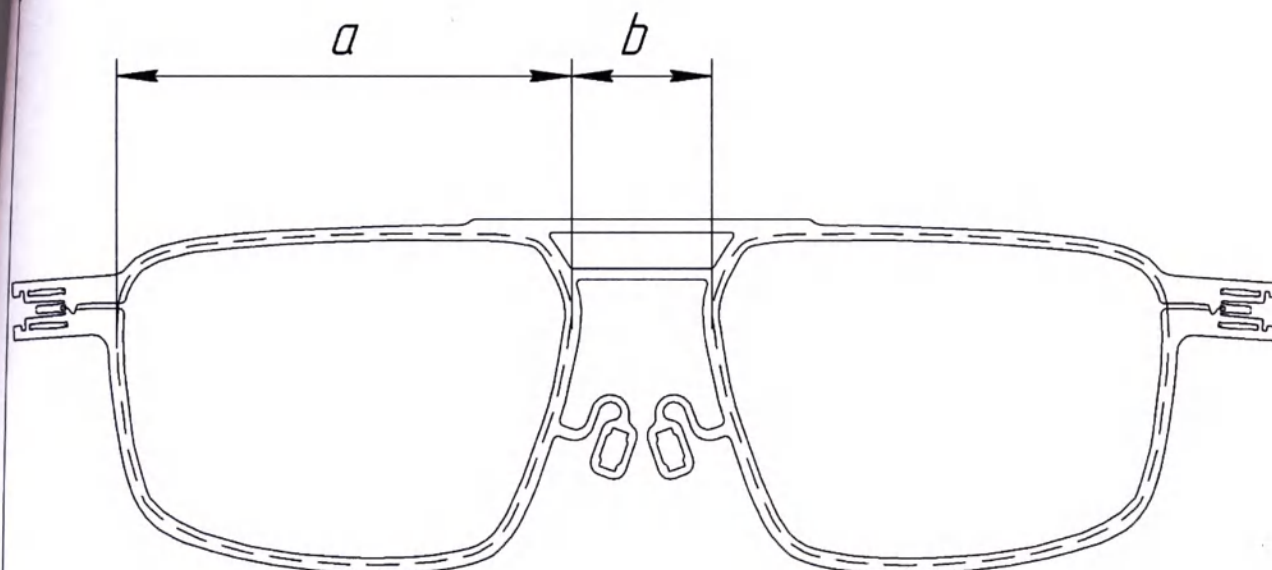

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	55	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
5	55	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
6	55	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
7	53	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	53	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	53	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	53	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
11	53	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
12	53	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
13	57	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	57	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	57	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	57	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
17	57	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
18	57	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
19	59	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	59	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	59	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	59	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
23	59	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
24	59	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
25	60	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	56	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	56	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	56	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	56	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	56	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный


Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Augusta

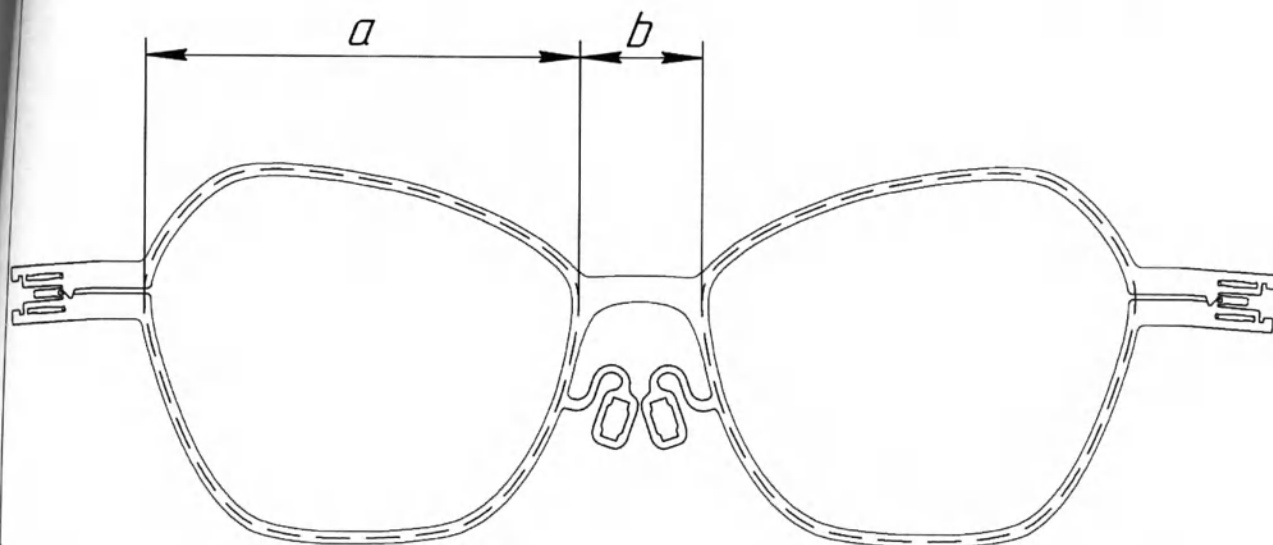

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	53	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	53	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
5	53	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
6	53	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
7	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	55	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	55	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
11	55	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
12	55	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
13	51	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	51	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	51	15	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	51	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
17	51	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
18	51	15	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
19	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	57	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
23	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
24	57	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
25	54	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	54	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
27	54	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
28	54	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	54	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	54	16	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	50	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	50	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	50	14	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	50	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	50	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	50	14	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный

Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Granada

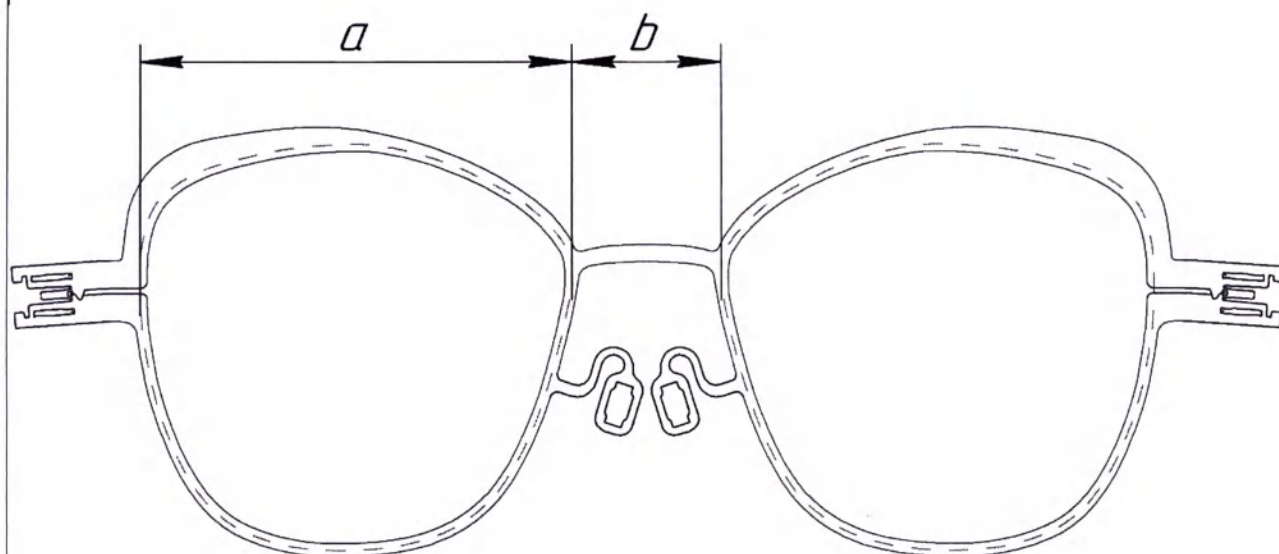

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	50	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
5	50	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
6	50	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
7	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	51	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	51	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
11	51	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
12	51	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
13	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	52	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	52	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
17	52	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
18	52	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
19	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	54	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	54	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
23	54	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
24	54	19	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
25	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
27	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
28	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	55	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	55	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный


Увн. №подл. Подпись и дата

Зам. инв. №

книг. №/дусол.

книг. №/дусол.

Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Pasadena

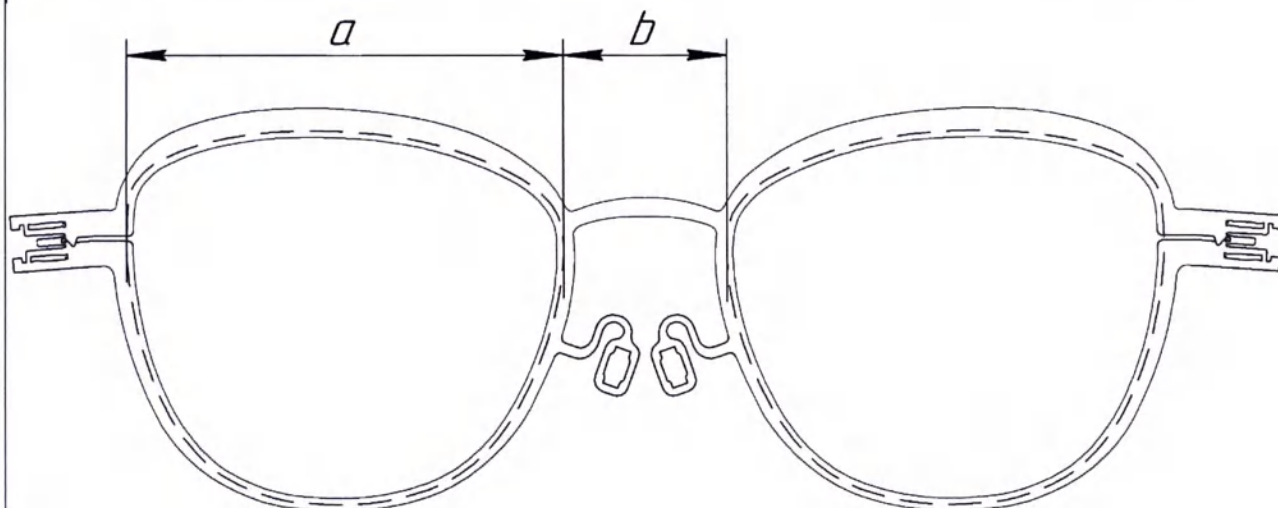

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	55	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	55	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
5	55	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
6	55	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
7	57	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	57	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	57	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	57	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
11	57	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
12	57	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
13	53	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	53	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	53	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	53	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
17	53	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
18	53	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
19	51	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	51	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	51	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	51	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
23	51	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
24	51	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
25	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
27	56	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный

Подпись и дата

Имя, отчество

Взам. инв. №

Подпись и дата

инв. №подл.

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
28	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	56	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	54	17	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный

Июль 2014 г.


Инв. №2/ДУОЛ

Взам. инв. №

Июль 2014 г.

Инв. №2/ДУОЛ

Оправа для очков корректирующих (для коррекции зрения) металлическая Ottawa

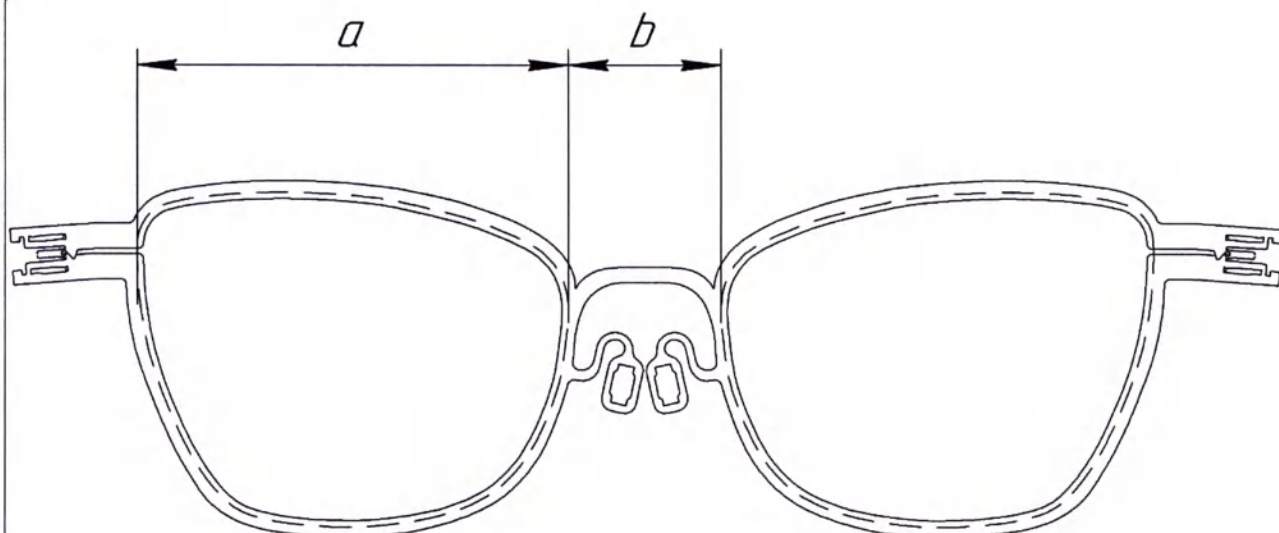

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
1	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
2	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
3	54	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
4	54	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
5	54	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
6	54	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
7	52	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
8	52	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
9	52	17	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
10	52	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
11	52	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
12	52	17	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
13	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
14	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
15	50	16	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
16	50	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
17	50	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
18	50	16	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
19	56	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
20	56	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
21	56	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
22	56	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Без цвета
23	56	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Золото
24	56	18	140	70	Титан: B-Titan 15333	9	Чёрный
25	58	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
26	58	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
27	58	19	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный

Июль и да

Инв. №докум.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

№п/п	a, мм	b, мм	L, мм	N, мм	материал	Масса оправы без линз, г	Цвет
28	58	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
29	58	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
30	58	19	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный
31	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Без цвета
32	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Золото
33	55	18	140	70	Нержавеющая сталь: AISI 301	11	Чёрный
34	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Без цвета
35	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Золото
36	55	18	140	70	Титан: В-Titan 15333	9	Чёрный

И подпись и дата


Кинв. № докл.

Взам. инв. №

И подпись и дата


инв. № подл.

Деталировка шарнирного узла

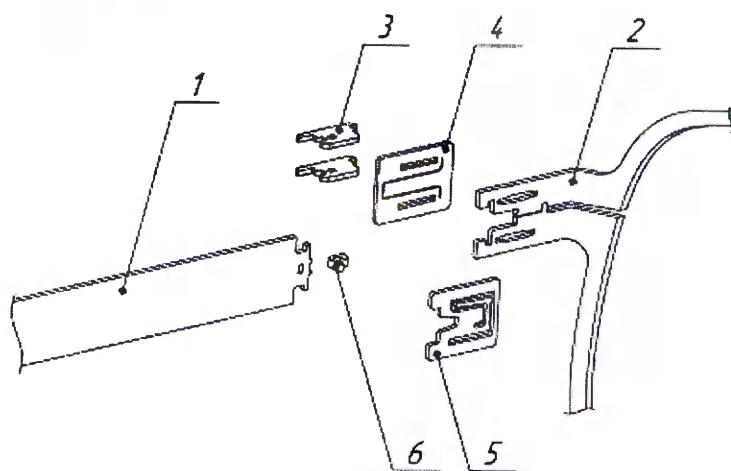


- 1. Защитник
- 2. Рамка
- 3. Поперечина (2 шт)
- 4. Стяжка
- 5. Замок
- 6. Эксцентрик


С внешней стороны в положении "разложено"

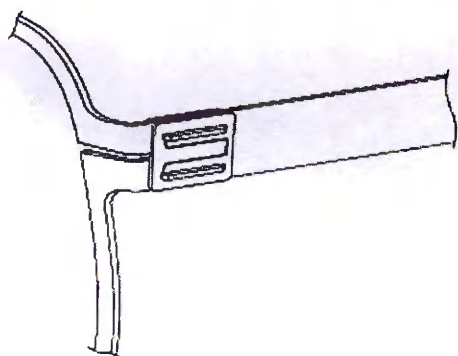

С внешней стороны в положении "сложено"

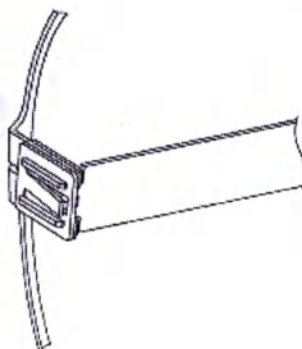

С внутренней стороны в положении "разложено"

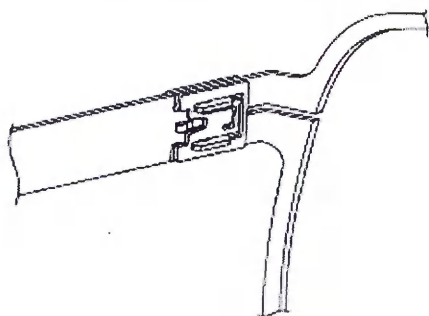

Сверху в положении "разложено"



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 92 (Девяносто два)

лист (а/ов)

Генеральный директор ООО «Алан-Абрис»

Гордеева Л.В.

