

«УТВЕРЖДАЮ» / “APPROVE”

Adenta GmbH

CEO /

(должность/position)

Claus-Dieter Splendell Gilching

(имя/name)

(подпись/signature)

«19» 08 2021

«день» месяц (цифрами) / «day» month
(numerals)

Gutenbergstraße 9
D-82205 Gilching
tel +49 (0)8105 73 43 6-0
fax +49 (0)8105 73 43 6-22
www.adenta.com

М.П. / Stamp

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

медицинского изделия

**Наборы брекетов для формирования несъемных
ортодонтических аппаратов**

производства

Адента ГмбХ / Adenta GmbH**Gutenbergstr. 9, 82205 Gilching, Germany (Германия)**

Содержание

1. Инструкция по применению

2. Приложение

1. Инструкция по применению.



Инструкция пользователя

Обращаем Ваше внимание, что данная продукция предназначена только для профессионального использования.

Письменные инструкции не могут охватить все возможные ситуации, которые могут возникнуть в ходе использования брекетов, поэтому специалист должен обладать определенным уровнем квалификации для использования указанной продукции.

Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за выбор этого высококачественного изделия компании Adenta. Для получения наилучших результатов при использовании этого изделия необходимо внимательно изучить инструкции по использованию и следовать им.

Письменные инструкции не могут охватить все возможные ситуации, которые могут возникнуть в ходе использования. Для этого у нас имеется горячая линия, специалисты которой смогут ответить на любые вопросы или разрешить любые возможные проблемы.

Учитывая постоянно ведущиеся разработки, даже если вы используете одни и те же продукты регулярно, мы рекомендуем вам изучить прилагаемую Инструкцию по применению или перейти на наш сайт www.adenta.com

1. Производитель

Adenta GmbH, Гутенбергштр. 9, 82205 Гильхинг, Германия

2. Этапы работы

2.1 Консультирование пациента

Расскажите пациенту о возможных последствиях и рисках, связанных с применением брекетов, в частности, с процессом дебондинга.

2.2 Установление требуемого состояния зубов

Тщательно проверьте каждый зуб на предмет наличия существенных повреждений эмали, чтобы избежать непредвиденного повреждения зубов во время дебондинга. Соблюдайте инструкции производителя по применению клея для брекетов, а также используйте таблицу клеев, приведенную в нашем каталоге ортодонтической продукции.

2.4 Извлечение и обработка

Захватите брекет Adenta мезиодистально, чтобы извлечь их из упаковки. При работе с ними соблюдайте следующие этапы. Избегайте касания основания брекетов пальцами или загрязнения иным путем, так как это может нарушить прочность крепления.

2.5 Нанесение клея для брекетов

Подготовьте клей для брекетов, пользуясь инструкциями производителя. Нанесите в центр основания брекета небольшое количество клея, достаточное для того, чтобы покрыть все его основание. Это позволит обеспечить оптимальную степень фиксации.

2.6 Размещение и позиционирование брекетов

После нанесения клея разместите брекет на зубе обычным способом.

Для удобства позиционирования используйте наружный контур брекетов. Обратите внимание, что паз иногда располагается не в центре брекета, что следует учитывать при позиционировании брекета!

Важно избегать контакта с антагонистом из-за риска истирания и (или) преждевременной потери брекета. При необходимости можно использовать небный подъем прикуса.

Необходимо следить, чтобы материал клея не попадал на крылья брекета с десенной или окклюзионной стороны, так как это может ограничить возможность лигирования.

До начала отверждения клея необходимо удалить все его излишки. Это особенно важно для того, чтобы обеспечить легкий дебондинг в конце лечения.

2.7 Лигирование арок

Следует соблюдать время отверждения клея согласно инструкциям производителя. После отверждения клея проведите лигирование проволокой или эластичной лигатурой по обычной методике.
2.8 Дебондинг брекетов Захватите брекеты мезиодистально за крючки и поверните влево или вправо, не стягивая его с зуба.
3. Информация по безопасности Данное изделие не следует применять в случае наличия у пациента аллергии на один или несколько из его компонентов.
4. Хранение Хранить брекеты Adenta необходимо в закрытой упаковке.
5. Информация об изделиях, предназначенных для одноразового использования Брекеты Adenta предназначены для одноразового использования. Повторная обработка брекетов Adenta, которые уже были использованы, и их повторное использование у пациентов запрещены. Точность размеров и качество фиксации брекетов после проведения повторной обработки не гарантируются, что связано с их механическим износом, происходящим в ходе процесса лечения и дебондинга.
6. Дополнительные советы Технические характеристики, включая момент вращения, угол, размеры и т. д., можно найти на этикетке изделия или в каталоге. Особых мер предосторожности по утилизации брекетов Adenta после их использования не приводится.
7. Программа поставок С полным ассортиментом товаров Adenta вы можете ознакомиться в нашем каталоге ортодонтической продукции.
8. Местные законы и требования Компания Adenta не несет ответственности за соблюдение местных законов, требований и нормативных актов. В обязанности дистрибьютора входит соблюдение всех местных законов, правил и требований. Таким образом, описанные выше процедуры в целом имеют рекомендательный характер, в связи с чем требуют адаптации/изменения в соответствии с местным законодательством, и эта задача входит в обязанности дистрибьютора.

Информация, содержащаяся в разделе «Предусмотренное применение», считается достоверной и точной. Тем не менее, компания Adenta не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно полноты информации, которая может потребоваться в конкретных ситуациях. В любом случае всегда необходимо соблюдать разумные меры предосторожности.

Составлено: 24.05.2017 Дополнено: Юлия Шендель (Julia Schendell)

2. ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Наименование медицинского изделия

Наборы брекетов для формирования несъемных ортодонтических аппаратов

Наборы брекетов для формирования несъемных ортодонтических аппаратов, варианты исполнения:

1. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:
 - Верхний левый центральный резец $T+12^{\circ}$, $A+4^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец $T+12^{\circ}$, $A+4^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец $T+8^{\circ}$, $A+9^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец $T+8^{\circ}$, $A+9^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком $T0^{\circ}$, $A+11^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком $T0^{\circ}$, $A+11^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр с крючком $T-7^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .018" – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр с крючком $T-7^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .018" – 2 шт.;
 - Нижний универсальный резец $T-1^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .018" – 4 шт.;
 - Нижний левый клык с крючком $T-11^{\circ}$, $A+5^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый клык с крючком $T-11^{\circ}$, $A+5^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый первый премоляр с крючком $T-17^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый первый премоляр с крючком $T-17^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый второй премоляр с крючком $T-22^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый второй премоляр с крючком $T-22^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
2. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:
 - Верхний левый центральный резец $T+12^{\circ}$, $A+4^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец $T+12^{\circ}$, $A+4^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец $T+8^{\circ}$, $A+9^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец $T+8^{\circ}$, $A+9^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком $T0^{\circ}$, $A+11^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком $T0^{\circ}$, $A+11^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр с крючком $T-7^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .022" – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр с крючком $T-7^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .022" – 2 шт.;
 - Нижний универсальный резец $T-1^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .022" – 4 шт.;
 - Нижний левый клык с крючком $T-11^{\circ}$, $A+5^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый клык с крючком $T-11^{\circ}$, $A+5^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний левый первый премоляр с крючком $T-17^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый первый премоляр с крючком $T-17^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний левый второй премоляр с крючком $T-22^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый второй премоляр с крючком $T-22^{\circ}$, $A0^{\circ}$, паз .022" – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
3. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:
 - Верхний левый центральный резец $T+17^{\circ}$, $A+4^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец $T+17^{\circ}$, $A+4^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец $T+10^{\circ}$, $A+8^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец $T+10^{\circ}$, $A+8^{\circ}$, паз .018" – 1 шт.;

- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
 - Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
 - Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
4. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:
- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
 - Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
 - Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
5. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE, вариант исполнения STANDARD EDGEWISE (вид МИ 236070), в составе:
- Верхний левый центральный резец T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр с крючком T0°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр с крючком T0°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
 - Нижний универсальный резец T0°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
 - Нижний левый клык с крючком T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый клык с крючком T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый первый премоляр с крючком T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый первый премоляр с крючком T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый второй премоляр с крючком T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый второй премоляр с крючком T0°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.

6. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE, вариант исполнения STANDARD EDGEWISE (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T0°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T0°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T0°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T0°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

7. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

8. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;

- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

9. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

10. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

11. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN Mini, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

12. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN Mini, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

13. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN Mini, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;

- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

14. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN Mini, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

15. Набор брекетов ортодонтических металлических, самолигирующих, модель FLAIR SLT, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

16. Набор брекетов ортодонтических металлических, самолигирующих, модель FLAIR SLT, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;

- Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

17. Набор брекетов ортодонтических металлических, самолигирующих, модель FLAIR SLT, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

18. Набор брекетов ортодонтических металлических, самолигирующих, модель FLAIR SLT, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

19. Набор брекетов ортодонтических лингвальных, самолигирующих, металлических, модель EVOLUTION SLT Lingual (40°) (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T40°, A0° – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T40°, A0° – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T40°, A0° – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T40°, A0° – 1 шт.;
- Верхний левый клык T40°, A0° – 1 шт.;
- Верхний левый клык T40°, A0° – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
- Верхний левый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Верхний правый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Верхний левый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Верхний правый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Нижний универсальный резец T40°, A0° – 4 шт.;
- Нижний левый клык T40°, A0° – 1 шт.;
- Нижний правый клык T40°, A0° – 1 шт.;
- Нижний левый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
- Нижний правый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
- Нижний левый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Нижний правый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Нижний левый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Нижний правый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

20. Набор брекетов ортодонтических лингвальных, самолигирующих, металлических, модель EVOLUTION SLT Lingual (60°) (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T60°, A0° – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T60°, A0° – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T60°, A0° – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T60°, A0° – 1 шт.;
- Верхний левый клык T60°, A0° – 1 шт.;
- Верхний левый клык T60°, A0° – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
- Верхний левый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Верхний правый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Верхний левый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Верхний правый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Нижний универсальный резец T60°, A0° – 4 шт.;
- Нижний левый клык T60°, A0° – 1 шт.;
- Нижний правый клык T60°, A0° – 1 шт.;
- Нижний левый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
- Нижний правый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
- Нижний левый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Нижний правый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Нижний левый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Нижний правый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

21. Набор брекетов ортодонтических лингвальных, металлических, модель JOY Lingual (40°) (вид МИ 236070), в составе:
- Верхний левый центральный резец T40°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец T40°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец T40°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец T40°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний левый клык T40°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний левый клык T40°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
 - Верхний левый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний правый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний левый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний правый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний универсальный резец T40°, A0° – 4 шт.;
 - Нижний левый клык T40°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний правый клык T40°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний левый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
 - Нижний правый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
 - Нижний левый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний правый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний левый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний правый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
22. Набор брекетов ортодонтических лингвальных, металлических, модель JOY Lingual (60°) (вид МИ 236070), в составе:
- Верхний левый центральный резец T60°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец T60°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец T60°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец T60°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний левый клык T60°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний левый клык T60°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
 - Верхний левый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний правый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний левый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Верхний правый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний универсальный резец T60°, A0° – 4 шт.;
 - Нижний левый клык T60°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний правый клык T60°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний левый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
 - Нижний правый премоляр T10°, A0° – 2 шт.;
 - Нижний левый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний правый первый моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний левый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Нижний правый второй моляр T10°, A0° – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.

23. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU NICKEL FREE, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

24. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU NICKEL FREE, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

25. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU NICKEL FREE, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;

- Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

26. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU NICKEL FREE, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

27. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU SS, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

28. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU SS, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;

- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

29. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU SS, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

30. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU SS, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;

- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022” – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

31. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU MASTER, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+4°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+4°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018” – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018” – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .018” – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018” – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018” – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018” – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018” – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018” – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018” – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

32. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU MASTER, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+12°, A+4°, паз .022” – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+4°, паз .022” – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022” – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022” – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .022” – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+11°, паз .022” – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022” – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022” – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-1°, A0°, паз .022” – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022” – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022” – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022” – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022” – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022” – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022” – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

33. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU MASTER, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018” – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018” – 2 шт.;

- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
 - Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
 - Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
34. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU MASTER, вариант исполнения MBT (вид МИ 236070), в составе:
- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
 - Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
 - Нижний левый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый клык с крючком T-6°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
35. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель CLEAR Ceramic, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236330), в составе:
- Верхний левый центральный резец T+11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец T+11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T0°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T0°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
 - Нижний универсальный резец T0°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
 - Нижний левый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый второй премоляр с крючком T-21°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый второй премоляр с крючком T-21°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
36. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель CLEAR Ceramic, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236330), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T0°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-21°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-21°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

37. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель CLEAR Ceramic, вариант исполнения MBT (вид МИ 236330), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T0°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T0°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

38. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель CLEAR Ceramic, вариант исполнения MBT (вид МИ 236330), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T0°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T0°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T0°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;

- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

39. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель DISCREET, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236330), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-2°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-2°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T0°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-21°, A+6°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-21°, A+6°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

40. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель DISCREET, вариант исполнения ROTH (вид МИ 236330), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-2°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-2°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T0°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+7°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-21°, A+6°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-21°, A+6°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

41. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель DISCREET, вариант исполнения MBT (вид МИ 236330), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;

- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T0°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T0°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

42. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель DISCREET, вариант исполнения MBT (вид МИ 236330), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+17°, A+4°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+10°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-7°, A+8°, паз .022" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T0°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T0°, A+3°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .022" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

43. Набор брекетов ортодонтических керамических, самолигирующих, модель BREEZE SL, вариант исполнения ROTH (вид МИ 212320), в составе:

- Верхний левый центральный резец T+15°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый центральный резец T+12°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
- Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
- Нижний универсальный резец T0°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
- Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .018" – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

44. Набор брекетов ортодонтических керамических, самолигирующих, модель BREEZE SL, вариант исполнения ROTH (вид МИ 212320), в составе:
- Верхний левый центральный резец T+15°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец T+12°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец T+8°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
 - Нижний универсальный резец T0°, A0°, паз .022" – 4 шт.;
 - Нижний левый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый клык с крючком T-11°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний левый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый первый премоляр с крючком T-17°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний левый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Нижний правый второй премоляр с крючком T-22°, A0°, паз .022" – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
45. Набор брекетов ортодонтических керамических, самолигирующих, модель BREEZE SL, вариант исполнения MBT (вид МИ 212320), в составе:
- Верхний левый центральный резец T+17°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец T+17°, A+5°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец T+10°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец T+10°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .018" – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .018" – 2 шт.;
 - Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .018" – 4 шт.;
 - Нижний левый клык с крючком T0°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый клык с крючком T0°, A+3°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
 - Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .018" – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
46. Набор брекетов ортодонтических керамических, самолигирующих, модель BREEZE SL, вариант исполнения MBT (вид МИ 212320), в составе:
- Верхний левый центральный резец T+17°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний правый центральный резец T+17°, A+5°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый латеральный резец T+10°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний правый латеральный резец T+10°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый клык с крючком T-2°, A+9°, паз .022" – 1 шт.;
 - Верхний левый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
 - Верхний правый премоляр с крючком T-7°, A0°, паз .022" – 2 шт.;
 - Нижний универсальный резец T-6°, A0°, паз .022" – 4 шт.;

- Нижний левый клык с крючком T0°, A+3°, паз .022” – 1 шт.;
- Нижний правый клык с крючком T0°, A+3°, паз .022” – 1 шт.;
- Нижний левый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .022” – 1 шт.;
- Нижний правый первый премоляр с крючком T-12°, A+2°, паз .022” – 1 шт.;
- Нижний левый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .022” – 1 шт.;
- Нижний правый второй премоляр с крючком T-17°, A+2°, паз .022” – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

2. Назначение медицинского изделия

Наборы брекетов для формирования несъемных ортодонтических аппаратов предназначены для исправления зубочелюстных аномалий

3. Показания и Противопоказания к применению медицинского изделия

Показания:

Нарушения прикуса;
Скученность зубов;
Диспропорциональное развитие челюстей;
Дистопия;
Необходимость восстановления нормальной плотности зубов.

Противопоказания:

Отсутствие большого количества зубов;
Заболевания иммунной системы;
Злокачественные опухоли и некоторые онкологические заболевания;
Заболевания крови;
Заболевания нервно-психического характера;
Данное изделие не следует применять в случае наличия у пациента аллергии на один или несколько из его компонентов.

4. Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия

Данные приспособления предназначены для использования квалифицированным медицинским персоналом в ходе ортодонтического лечения. Изделия применяются для формирования несъемных ортодонтических аппаратов.
Только для профессионального применения.

5. Описание основных функциональных элементов медицинского изделия

Вариант исполнения	Фотография	Масса в граммах с предельно допустимым отклонением	Описание
Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE (ROTH, MBT, STANDARD EDGEWISE) пазы		Центральный резец, премоляры: $0,078 \pm 10\%$ Нижние передние: $0,058 \pm 10\%$ Брекеты с хуком: $0,103 \pm 10\%$	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Большое количество

0.18", .022"			поднутрений для облегчения фиксации лигатурной проволоки и эластичной лигатуры, высокая прочность соединения.
Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN (ROTH, MBT) пазы 0.18", .022"		Центральный резец, премоляры: $0,066 \pm 10\%$ Нижние передние: $0,059 \pm 10\%$ Брекеты с хуком: $0,082 \pm 10\%$	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Большое количество поднутрений для облегчения фиксации лигатурной проволоки и эластичной лигатуры, высокая прочность соединения.
Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN Mini (ROTH, MBT) пазы 0.18", .022"		Центральные резцы, премоляры: $0,055 \pm 10\%$ Нижние передние: $0,062 \pm 10\%$ Брекеты с хуком: $0,082 \pm 10\%$	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Большое количество поднутрений для облегчения фиксации лигатурной проволоки и эластичной лигатуры, высокая прочность соединения, меньше и ниже обычных брекетов CROWN.
Набор брекетов ортодонтических металлических, самолигирующих, модель FLAIR SLT (ROTH, MBT) пазы 0.18", .022"		Центральные резцы, латеральные резцы, клыки, премоляры, моляры с небольшим основанием: $0,071 \pm 10\%$ Моляры с широким основанием: $0,083 \pm 10\%$	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Легкое открытие и закрытие, отсутствие блокировки зажима, меньше дискомфорта для пациента. Самолигирующиеся.

Набор брекетов ортодонтических лингвальных, самолигирующих, металлических, модель EVOLUTION SLT Lingual (40°, 60°)		Центральные резцы, премоляры: 0,063 ±10% Нижние передние: 0,059 ±10% Брекеты с хуком: 0,067 ±10%	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Легкое открытие и закрытие, отсутствие блокировки зажима, меньше дискомфорта для пациента. Самолигирующиеся. Лингвальные.
Набор брекетов ортодонтических лингвальных, металлических, модель JOY Lingual (40°, 60°)		Центральные резцы, латеральные резцы, клыки: 0,045 ±10% Премоляры, моляры: 0,056 ±10%	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Низкий профиль для упрощения лечения, высокая прочность прикрепления. Лингвальные.
Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU SS (ROTH, MBT) пазы 0.18", .022"		Центральные резцы, премоляры: 0,065 ±10% Нижние передние: 0,062 ±10% Брекеты с хуком: 0,065 ±10%	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Большое количество поднутрений для облегчения фиксации лигатурной проволоки и эластичной лигатуры, высокая прочность соединения.
Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU NICKEL FREE (ROTH, MBT) пазы 0.18", .022"		Центральные резцы, премоляры: 0,076 ±10% Нижние передние: 0,067 ±10% Брекеты с хуком: 0,066 ±10%	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Большое количество поднутрений для облегчения фиксации лигатурной проволоки и эластичной лигатуры,

			высокая прочность соединения.
Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU MASTER (ROTH, MBT) пазы 0.18", .022"		Центральные резцы, премоляры: $0,063 \pm 10\%$ Нижние передние: $0,059 \pm 10\%$ Брекеты с хуком: $0,067 \pm 10\%$	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Большое количество поднутрений для облегчения фиксации лигатурной проволоки и эластичной лигатуры, высокая прочность соединения.
Набор брекетов ортодонтических керамических, модель CLEAR Ceramic (ROTH, MBT) пазы 0.18", .022"		Центральные резцы, премоляры: $0,072 \pm 10\%$ Нижние передние: $0,061 \pm 10\%$ Брекеты с хуком: $0,084 \pm 10\%$	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Прозрачные брекеты, менее заметны во время лечения.
Набор брекетов ортодонтических керамических, модель DISCREET (ROTH, MBT) пазы 0.18", .022"		Центральные резцы, премоляры: $0,022 \pm 10\%$ Нижние передние: $0,022 \pm 10\%$ Брекеты с хуком: $0,022 \pm 10\%$	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Прозрачные брекеты, менее заметны во время лечения.
Набор брекетов ортодонтических керамических, самолигирующих, модель BREEZE SL (ROTH, MBT) пазы 0.18", .022"		Центральные резцы, премоляры: $0,022 \pm 10\%$ Нижние передние: $0,022 \pm 10\%$ Брекеты с хуком: $0,022 \pm 10\%$	Брекеты ортодонтические Адента предназначены для ортодонтического перемещения естественных зубов. Прозрачные брекеты, менее заметны во время лечения. Самолигирующиеся.

6. Шероховатость и твердость металлических сплавов

	Твердость по Роквеллу HRC	Шероховатость, мкм
Металлические брекеты: - Сталь нержавеющая Adenta GmbH - Сталь нержавеющая безникелевая (Fe20Cr4Mo CuCo)	Не менее 80	Не более 1.25

7. Спецификация керамических брекетов в соответствии со стандартом ISO 6872:1995

- Набор брекетов ортодонтических керамических, модель CLEAR Ceramic варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")
- Набор брекетов ортодонтических керамических, модель DISCREET варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")
- Набор брекетов ортодонтических керамических, самолигирующих, модель BREEZE SL варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

Стандарт ISO 6872:1995 не распространяется на вышеуказанные продукты, поскольку он не применим для брекет-систем.

8. Схемы медицинского изделия

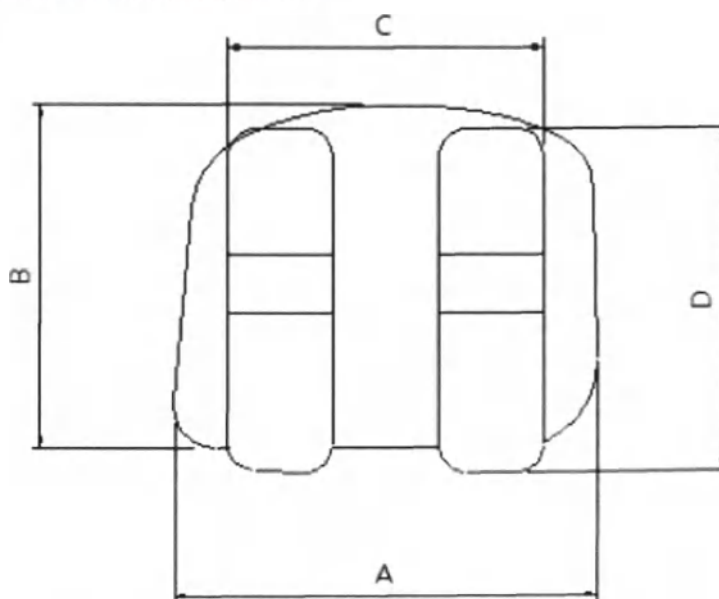


Рис. Схематическое изображение брекета, вид сверху

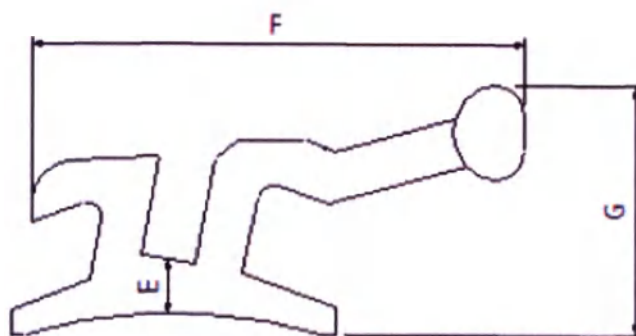


Рис. Схематическое изображение брекета, вид сбоку

Наборы брекетов для формирования несъемных ортодонтических аппаратов

1. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE, варианты исполнения ROTH, MBT, STANDARD EDGEWISE (пазы 0.18", .022")

Article No.: #	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)	E, мм (±2%)	G, мм (±2%)	H, мм (±2%)
#-11	3,50	3,40	4,60	2,00	0,79		
#-12	3,00	3,40	4,00	2,00	1,28		
#-13	3,40	3,40	4,00	1,80	0,69		
#-14	3,50	3,40	4,00	1,80	0,69		
#-15	3,50	3,40	4,00	1,80	0,69		
#-21	3,50	3,40	4,60	2,00	0,79		
#-22	3,00	3,40	4,00	2,00	1,28		
#-23	3,40	3,40	4,00	1,80	0,69		
#-24	3,50	3,40	4,00	1,80	0,69		
#-25	3,50	3,40	4,00	1,80	0,69		
#-31	2,30	3,40	3,00	2,10	1,28		
#-32	2,30	3,40	3,00	2,10	1,28		
#-33	3,40	3,40	4,00	1,80	0,64		
#-34	3,50	3,40	4,00	1,80	0,46		
#-35	3,50	3,40	4,00	1,80	0,46		
#-41	2,30	3,40	3,00	2,10	1,28		
#-42	2,30	3,40	3,00	2,10	1,28		

#-43	3,40	3,40	4,00	1,80	0,64		
#-44	3,50	3,40	4,00	1,80	0,46		
#-45	3,50	3,40	4,00	1,80	0,46		
#-13/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,69	2,50	5,40
#-14/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,69	2,50	5,40
#-15/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,69	2,50	5,40
#-23/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,69	2,50	5,40
#-24/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,69	2,50	5,40
#-25/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,69		5,40
#-33/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,64	2,50	5,40
#-34/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,46	2,50	5,40
#-35/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,46	2,50	5,40
#-43/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,64	2,50	5,40
#-44/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,46	2,50	5,40
#-45/H	3,60	3,60	4,00	2,20	0,46	2,50	5,40

2. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

Article No.: #	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)	E, мм (±2%)	H, мм (±2%)	G, мм (±2%)
#-11	4,00	3,30	3,10	3,15	0,84		2,15
#-12	3,75	3,30	2,70	3,20	1,15		2,15
#-13	3,90	3,30	3,00	3,00	0,60		2,00
#-14	4,00	3,80	3,00	3,50	0,68		2,00
#-15	4,00	3,80	3,00	3,50	0,68		2,00
#-21	4,00	3,30	3,10	3,15	0,84		2,15
#-22	3,75	3,30	2,70	3,20	1,15		2,15
#-23	3,90	3,30	3,00	3,00	0,60		2,00
#-24	4,00	3,80	3,00	3,50	0,68		2,00
#-25	4,00	3,80	3,00	3,50	0,68		2,00
#-31	3,10	3,40	2,65	3,10	1,05		2,00
#-32	3,10	3,40	2,65	3,10	1,05		2,00
#-33	3,90	3,30	3,00	3,00	0,56		2,00
#-34	4,00	3,80	3,10	3,50	0,54		2,00
#-35	4,00	3,80	3,10	3,50	0,52		2,00
#-41	3,10	3,40	2,65	3,10	1,05		2,00
#-42	3,10	3,40	2,65	3,10	1,05		2,00

#-43	3,90	3,30	3,00	3,00	0,56		2,00
#-44	4,00	3,80	3,10	3,50	0,54		2,00
#-45	4,00	3,80	3,10	3,50	0,52		2,00
#-13/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,60	5,20	2,45
#-14/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,68	5,20	2,45
#-15/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,68	5,20	2,45
#-23/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,60	5,20	2,45
#-24/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,68	5,20	2,45
#-25/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,68	5,20	2,45
#-33/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,56	5,20	2,45
#-34/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,54	5,20	2,45
#-35/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,52	5,20	2,45
#-43/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,56	5,20	2,45
#-44/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,54	5,20	2,45
#-45/Н	4,00	3,20	3,00	3,80	0,52	5,20	2,45

3. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN Mini, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

Article No.: #	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)	G, мм (±2%)
#-11	3,90	3,20	3,00	1,90	1,80
#-11-17	3,90	3,20	3,00	1,90	1,80
#-11-22	3,90	3,20	3,00	1,90	1,80
#-12	3,60	3,20	3,00	2,00	1,85
#-12-12	3,60	3,20	3,00	2,00	1,85
#-12-16	3,60	3,20	3,00	2,00	1,85
#-13	3,70	2,60	3,00	1,80	1,90
#-14/15	3,80	3,00	3,10	1,90	1,90
#-21	3,90	3,20	3,00	1,90	1,80
#-21-17	3,90	3,20	3,00	1,90	1,80
#-21-22	3,90	3,20	3,00	1,90	1,80
#-22	3,60	3,20	3,00	2,00	1,85
#-22-12	3,60	3,20	3,00	2,00	1,85
#-22-16	3,60	3,20	3,00	2,00	1,85
#-23	3,70	2,60	3,00	1,80	1,90
#-24/15	3,80	3,00	3,10	1,90	1,90
#-31/32	3,20	3,20	3,00	3,10	1,80
#-31/32-3	3,20	3,20	3,00	3,10	1,80
#-31/32-6	3,20	3,20	3,00	3,10	1,80
#-33	3,60	3,00	2,80	1,90	1,85
#-34	3,80	3,00	3,10	1,90	1,85
#-35	3,80	3,00	3,10	1,90	1,85
#-41/42	3,20	3,20	3,20	2,00	1,80
#-41/42-3	3,20	3,20	3,20	2,00	1,80
#-41/42-6	3,20	3,20	3,20	2,00	1,80
#-43	3,60	3,00	2,80	1,90	1,85
#-44	3,80	3,00	3,10	1,90	1,85
#-45	3,80	3,00	3,10	1,90	1,85
#-13/Н	3,70	2,60	3,00	1,80	1,80
#-14/15/Н	3,80	3,00	3,10	1,90	1,80
#-23/Н	3,70	2,60	3,00	1,80	1,80
#-24/25/Н	3,80	3,00	3,10	1,90	1,90
#-33/Н	3,60	3,00	2,80	1,90	1,90
#-34/Н	3,80	3,00	3,10	1,90	1,90

#-35/H	3,80	3,00	3,10	1,90	1,90
#-43/H	3,60	3,00	2,80	1,90	1,90
#-44/H	3,80	3,00	3,10	1,90	1,90
#-45/H	3,80	3,00	3,10	1,90	1,90

4. Набор брекетов ортодонтических металлических, самолигирующих, модель FLAIR SLT, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

Article No.:	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)	G, мм (±2%)
#-11	3,60	3,60	2,60	2,20	1,60
#-11-17	3,60	3,60	2,60	2,20	1,60
#-11-22	3,60	3,60	2,60	2,20	1,70
#-12	3,40	3,60	2,60	2,30	1,80
#-12-12	3,40	3,60	2,60	2,30	1,60
#-12-16	3,40	3,60	2,60	2,30	1,80
#-13	3,70	3,30	2,80	2,30	1,80
#-14/15	3,80	3,70	2,80	2,40	1,80
#-21	3,60	3,60	2,60	2,20	1,60
#-21-17	3,60	3,60	2,60	2,20	1,70
#-21-22	3,60	3,60	2,60	2,20	1,80
#-22	3,40	3,60	2,60	2,30	1,60
#-22-12	3,40	3,60	2,60	2,30	1,80
#-22-16	3,40	3,60	2,60	2,30	1,80
#-23	3,70	3,30	2,80	2,30	1,80
#-24/15	3,80	3,70	2,80	2,40	1,80
#-31/32	3,20	3,70	2,60	2,30	1,60
#-31/32-3	3,20	3,70	2,60	2,30	1,70
#-31/32-6	3,20	3,70	2,60	2,30	1,80
#-33	3,60	3,00	2,80	1,90	1,60
#-34	3,80	3,70	2,80	2,40	1,80
#-35	3,80	3,70	2,80	2,40	1,80
#-41/42	3,20	3,70	2,60	2,30	1,60
#-41/42-3	3,20	3,70	2,60	2,30	1,70
#-41/42-6	3,20	3,70	2,60	2,30	1,80
#-43	3,60	3,00	2,80	1,90	1,60
#-44	3,80	3,70	2,80	2,40	1,80
#-45	3,80	3,70	2,80	2,40	1,80

5. Набор брекетов ортодонтических лингвальных, самолигирующих, металлических, модель EVOLUTION SLT Lingual (40°, 60°)

Article No.:	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)
300-40	3,15	3,50	2,35	3,35
300-60				
300-40	3,15	3,50	2,35	3,35
300-60				
300-40	3,15	3,50	2,35	3,35
300-60				
300-14/45	3,50	3,25	2,65	3,10
300-14/45	3,50	3,25	2,65	3,10
300-40	3,15	3,50	2,35	3,35
300-60				

300-40 300-60	3,15	3,50	2,35	3,35
300-40 300-60	3,15	3,50	2,35	3,35
300-14/45	3,50	3,25	2,65	3,10
300-14/45	3,50	3,25	2,65	3,10
300-10W	3,80	3,70	2,80	2,40
300-10S	3,80	3,70	2,80	2,40
300-40 300-60	3,15	3,50	2,35	3,35
300-40 300-60	3,15	3,50	2,35	3,35
300-40 300-60	3,15	3,50	2,35	3,35
300-14/45	3,50	3,25	2,65	3,10
300-14/45	3,50	3,25	2,65	3,10
300-10W	3,80	3,70	2,80	2,40
300-10S	3,80	3,70	2,80	2,40
300-40 300-60	3,15	3,50	2,35	3,35
300-40 300-60	3,15	3,50	2,35	3,35
300-40 300-60	3,15	3,50	2,35	3,35
300-14/45	3,50	3,25	2,65	3,10
300-14/45	3,50	3,25	2,65	3,10
300-10W	3,80	3,70	2,80	2,40
300-10S	3,80	3,70	2,80	2,40

6. Набор брекетов ортодонтических лингвальных, металлических, модель JOY Lingual (40°, 60°)

Article No.:	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)	E, мм (±2%)	G, мм (±2%)
350-60U	3,00	2,30	3,50	1,70	3,40	1,90
350-60L	3,00	2,30	3,50	1,70	3,40	1,90
350-40U	3,00	2,30	3,50	1,70	3,40	1,90
350-40L	3,00	2,30	3,50	1,70	3,40	1,90
350-14/45	3,40	2,10	3,00	1,80	2,70	1,90
350-17/47	3,80	3,10	2,80	1,90	2,80	1,90

7. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU NICKEL FREE, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

Article No. #	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)	G, мм (±2%)	H, мм (±2%)
105-11	3,83	3,40	3,80	3,00	1,90	
105-12	3,05	3,05	2,95	3,00	2,00	
105-13	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	
105-14	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	
105-15	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	
105-21	3,83	3,40	3,80	3,00	1,90	
105-22	3,05	3,05	2,95	3,00	2,00	
105-23	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	
105-24	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	

105-25	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	
105-31	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-32	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-33	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	
105-34	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	
105-35	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	
105-41	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-42	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-43	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	
105-44	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	
105-45	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	
105-13/H	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	4,47
105-14/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-15/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-23/H	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	4,47
105-24/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-25/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-33/H	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	4,78
105-34/H	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	4,78
105-35/H	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	4,78
105-43/H	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	4,78
105-44/H	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	4,78
105-45/H	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	4,78

8. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU SS, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

Article No.: #	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)	G, мм (±2%)	H, мм (±2%)
105-11	3,83	3,40	3,80	3,00	1,90	
105-12	3,05	3,05	2,95	3,00	2,00	
105-13	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	
105-14	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	
105-15	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	
105-21	3,83	3,40	3,80	3,00	1,90	
105-22	3,05	3,05	2,95	3,00	2,00	
105-23	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	
105-24	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	
105-25	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	
105-31	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-32	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-33	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	
105-34	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	
105-35	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	
105-41	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-42	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-43	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	
105-44	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	
105-45	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	
105-13/H	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	4,47
105-14/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-15/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-23/H	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	4,47

105-24/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-25/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-33/H	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	4,78
105-34/H	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	4,78
105-35/H	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	4,78
105-43/H	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	4,78
105-44/H	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	4,78
105-45/H	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	4,78

9. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU MASTER
варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

Article No.: #	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)	G, мм (±2%)	H, мм (±2%)
105-11	3,83	3,40	3,80	3,00	1,90	
105-12	3,05	3,05	2,95	3,00	2,00	
105-13	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	
105-14	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	
105-15	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	
105-21	3,83	3,40	3,80	3,00	1,90	
105-22	3,05	3,05	2,95	3,00	2,00	
105-23	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	
105-24	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	
105-25	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	
105-31	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-32	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-33	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	
105-34	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	
105-35	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	
105-41	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-42	2,80	3,65	2,75	2,95	2,40	
105-43	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	
105-44	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	
105-45	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	
105-13/H	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	4,47
105-14/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-15/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-23/H	3,25	2,95	3,00	3,00	2,00	4,47
105-24/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-25/H	3,40	3,40	3,05	3,00	2,10	4,47
105-33/H	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	4,78
105-34/H	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	4,78
105-35/H	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	4,78
105-43/H	3,30	3,20	3,10	3,10	1,90	4,78
105-44/H	3,60	3,45	3,10	3,10	1,90	4,78
105-45/H	3,60	3,50	3,10	3,00	2,00	4,78

10. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель CLEAR Ceramic варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

Article No.	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)	H, мм (±2%)	G, мм (±2%)
#-11	3,20	3,80	3,20	4,00		2,15
#-12	3,00	3,80	3,00	3,80		2,40
#-13	3,50	3,60	3,50	6,70		2,10
#-14	3,20	3,80	3,20	3,20		2,20
#-15	3,20	3,80	3,20	3,20		2,20
#-21	3,20	3,80	3,20	4,00		2,15
#-22	3,00	3,80	3,00	3,80		2,40
#-23	3,50	3,60	3,50	6,70		2,10
#-24	3,20	3,80	3,20	3,20		2,20
#-25	3,20	3,80	3,20	3,20		2,20
#-31	2,80	3,80	2,80	2,80		2,25
#-32	2,80	3,60	2,80	3,80		2,45
#-33	3,50	3,60	3,70	3,50		2,00
#-34	3,15	3,60	3,15	3,30		2,25
#-35	3,20	6,60	3,20	4,20		2,05
#-41	2,80	3,80	2,80	2,80		2,25
#-42	2,80	3,60	2,80	3,80		2,45
#-43	3,50	3,60	3,70	3,50		2,00
#-44	3,15	3,60	3,15	3,30		2,25
#-45	3,20	6,60	3,20	4,20		2,05
#-13/H	3,50	3,60	3,50	6,70	5,20	2,10
#-14/H	3,20	3,80	3,20	3,20	5,20	2,20
#-15/H	3,20	3,80	3,20	3,20	5,20	2,20
#-23/H	3,50	3,60	3,70	3,50	5,20	2,10
#-24/H	3,15	3,60	3,15	3,30	5,20	2,20
#-25/H	3,20	6,60	3,20	4,20	5,20	2,20
#-33/H	3,50	3,60	3,70	3,50	5,20	2,00
#-34/H	3,15	3,60	3,15	3,30	5,20	2,25
#-35/H	3,20	6,60	3,20	4,20	5,20	2,05
#-43/H	3,50	3,60	3,70	3,50	5,20	2,00
#-44/H	3,15	3,60	3,15	3,30	5,20	2,25
#-45/H	3,20	6,60	3,20	4,20	5,20	2,05

11. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель DISCREET варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

Article No.	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)	H, мм (±2%)	G, мм (±2%)
#-11	3,15	3,80	3,15	4,00		2,10
#-12	2,90	3,70	2,90	3,75		2,30
#-13	3,50	3,55	3,50	3,60		1,85
#-14	3,15	3,80	3,30	3,90		2,10
#-15	3,15	3,80	3,30	3,90		2,10
#-21	3,15	3,80	3,15	4,00		2,10
#-22	2,90	3,70	2,90	3,75		2,30
#-23	3,50	3,55	3,50	3,60		1,85
#-24	3,15	3,80	3,30	3,90		2,10
#-25	3,15	3,80	3,30	3,90		2,10
#-31	2,85	3,70	2,80	3,80		2,30
#-32	2,85	3,70	2,80	3,80		2,30
#-33	3,45	3,65	3,45	3,50		1,80

#-34	3,15	3,60	3,20	4,00		2,20
#-35	3,10	3,60	3,20	4,00		2,25
#-41	2,85	3,70	2,80	3,80		2,30
#-42	2,85	3,70	2,80	3,80		2,30
#-43	3,45	3,65	3,45	3,50		1,80
#-44	3,15	3,60	3,20	4,00		2,20
#-45	3,10	3,60	3,20	4,00		2,25
#-13/H	3,50	3,55	3,50	3,60	5,20	1,85
#-14/H	3,15	3,80	3,30	3,90	5,20	2,10
#-15/H	3,15	3,80	3,30	3,90	5,20	2,10
#-23/H	3,50	3,55	3,50	3,60	5,20	1,85
#-24/H	3,15	3,80	3,30	3,90	5,20	2,10
#-25/H	3,15	3,80	3,30	3,90	5,20	2,10
#-33/H	3,45	3,65	3,45	3,50	5,20	1,80
#-34/H	3,15	3,60	3,20	4,00	5,20	2,20
#-35/H	3,10	3,60	3,20	4,00	5,20	2,25
#-43/H	3,45	3,65	3,45	3,50	5,20	1,80
#-44/H	3,15	3,60	3,20	4,00	5,20	2,20
#-45/H	3,10	3,60	3,20	4,00	5,20	2,25

12. Набор брекетов ортодонтических керамических, самолигирующих, модель BREEZE SL варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

Article No.:	A, мм (±2%)	B, мм (±2%)	C, мм (±2%)	D, мм (±2%)	E, мм (±2%)	G, мм (±2%)
05-31-42-S	3,10	3,30	2,40	3,00	1,15	2,00
55-31-42-S	3,10	3,30	2,40	3,00	1,15	2,00

9. Описание составных частей (узлов) медицинского изделия (при наличии)

Не применимо.

10. Описание основных принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием (при наличии):

Не применимо. Принадлежности и аксессуары к МИ отсутствуют.

11. Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента (телом человека)

Наименование изделия	Материалы, применяемые при изготовлении	Вид и продолжительность контакта с организмом (ISO 10993)
1. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE, варианты	Сталь нержавеющая Adenta GmbH, состава: Железо: 52-78%	Постоянный контакт (более 30 суток) со слизистыми

исполнения ROTH, MBT, STANDARD EDGEWISE (пазы 0.18", .022") 2. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022") 3. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN Mini, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022") 4. Набор брекетов ортодонтических металлических, самолигирующих, модель FLAIR SLT, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022") 5. Набор брекетов ортодонтических лингвальных, самолигирующих, металлических, модель EVOLUTION SLT Lingual (40°, 60°) 6. Набор брекетов ортодонтических лингвальных, металлических, модель JOY Lingual (40°, 60°)	Хром: 12-21% Кремний: 1-4,5% Никель: 6-18% Молибден: 0-5% Марганец: 1-2% Вольфрам: 0-1,8% Алюминий: 0-1,5% Ниобий: 0-1,0% Титан: 0-0,7% Медь: менее 1% Кобальт: 0-1%	оболочками
1. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU NICKEL FREE, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022") 2. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU SS, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022") 3. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU MASTER варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")	Сталь нержавеющая безникелевая (Fe20Cr4MoCuCo) Железо: 60-70% Хром: 15-30% Кремний: 0-10% Молибден: 0-10% Марганец: 0-10% Кобальт: 0-10%	Постоянный контакт (более 30 суток) со слизистыми оболочками
1. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель CLEAR Ceramic варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022") 2. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель DISCREET варианты исполнения ROTH, MBT (пазы	Сополимер компанд Adenta GmbH;	Постоянный контакт (более 30 суток) со слизистыми оболочками

0.18", .022") 3. Набор брекетов ортодонтических керамических, самолигирующих, модель BREEZE SL варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")		
---	--	--

12. Данные о маркировке медицинского изделия



Рис. Образец маркировки МИ, вариант исполнения Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE, вариант исполнения ROTH



Рис. Образец маркировки МИ, вариант исполнения Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN, вариант исполнения ROTH




CROWN Mini BRACKET MBT .018

1 Case/Fall 5-5 U+L

Hook on 3



CE 0123

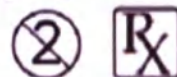

REF 106M-001/H/ LOT 123 123
10



Adenta GmbH - P.O. Box 1445
D-82199 Gilching/Germany

Рис. Образец маркировки МИ, вариант исполнения Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN Mini, вариант исполнения MBT




FLAIR SLT BRACKET ROTH .022

1 Case/Fall 5-5 U+L



CE 0123

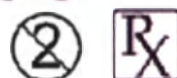

REF 255M-001/HT LOT 123 123



Adenta GmbH - P.O. Box 1445
D-82199 Gilching/Germany

Рис. Образец маркировки МИ, вариант исполнения Набор брекетов ортодонтических металлических, самолигирующих, модель FLAIR SLT, вариант исполнения ROTH



EVOLUTION SLT BRACKET 40°

1 Case/Fall 7-7

UPPER



CE 0123



REF 300-007/40U LOT 123 123



Adenta GmbH - P.O. Box 1445
D-82199 Gilching/Germany

Рис. Образец маркировки МИ, вариант исполнения Набор брекетов ортодонтических лингвальных, самолигирующих, металлических, модель EVOLUTION SLT Lingual (40°)



JOY LINGUAL BRACKET 60°


1 Case/Fall 5-5 U+L



CE 0123

REF 350-001/60

LOT 123 123

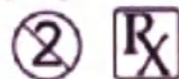

Adenta GmbH - P.O. Box 1445
D-82199 Gilching/Germany


Рис. Образец маркировки МИ, вариант исполнения Набор брекетов ортодонтических лингвальных, металлических, модель JOY Lingual (60°)



BIJOU NICKEL FREE BRACKET MBT .022

1 Case/Fall 5-5 U+L


Hook on 3

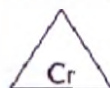

CE 0123

REF 566-001/H

LOT 123 123

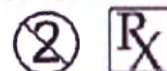

Adenta GmbH - P.O. Box 1445
D-82199 Gilching/Germany

Рис. Образец маркировки МИ, вариант исполнения Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU NICKEL FREE, вариант исполнения MBT



BIJOU ST. STEEL BRACKET MBT .022

1 Case/Fall 5-5 U+L


Hook on 3/4/5



CE 0123

REF 766-001/H34

LOT 123 123

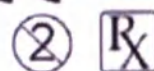

5



Adenta GmbH - P.O. Box 1445
D-82199 Gilching/Germany

Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU SS, вариант исполнения MBT




Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU MASTER, вариант исполнения ROTH



Рис. Образец маркировки МИ, вариант исполнения Набор брекетов ортодонтических керамических, модель CLEAR Ceramic, вариант исполнения MBT



Рис. Образец маркировки МИ, вариант исполнения Набор брекетов ортодонтических керамических, модель DISCREET, вариант исполнения MBT

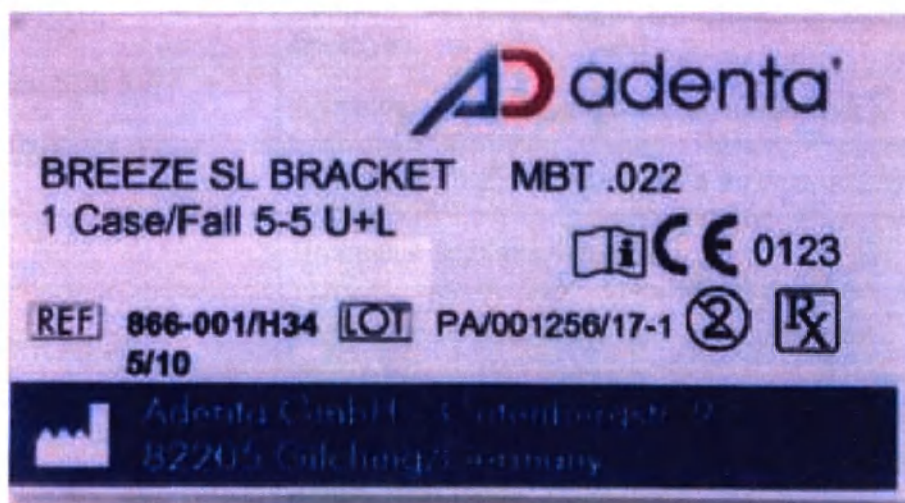

Набор брекетов ортодонтических керамических, самолигирующих, модель BREEZE SL, вариант исполнения MBT

REF	
Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE, вариант исполнения ROTH	
СРОК ГОДНОСТИ: ДД.ММ.ГГГГ	НЕСТЕРИЛЬНО Изделия не подлежат стерилизации.
Производитель	Adenta GmbH, Gutenbergstr. 9, 82205 Gilching, Germany
Уполномоченный представитель	ООО «ДиЭСТА» 119049, г. Москва, ул.Ленинский проспект, д.4А, стр.23 Тел.: +7(495) 955-01-02 diesta1@mail.ru diesta2@gmail.com
Регистрационное удостоверение	РЗН 202Х/XXXX ДД.ММ.ГГГГ

Рис. Макет маркировки на русском языке

Обозначения символов на маркировке

Символ	Расшифровка
	Производитель
REF	Номер по каталогу
LOT	Код партии
	Запрет на повторное применение
	Внимание! Реализация данного изделия производится только врачам или по предписанию врача
CE 0123	Соответствие стандартам ЕС
	Товарный знак производителя
BIJOU NICKEL FREE BRACKET	Наименование МИ
MBT .022	Вариант исполнения (MBT или ROTH или STANDARD EDGEWISE), тип паза (.018" или .022")

60°	Вариант исполнения (40 или 60°) для лингвальных брекетов
1 Case/Fall 5-5	1 упаковка (набор), с пятого по пятый зуб
1 Case/Fall 7-7	1 упаковка (набор), с седьмого по седьмой зуб
U+L	Нижняя + верхняя челюсть
Hook on 3	Информация о наличии крючка на брекетах
	Предупреждения о содержании в МИ хрома
	Предупреждения о содержании в МИ хрома и никеля

13. Данные об упаковке медицинского изделия

Наборы брекетов для формирования несъемных ортодонтических аппаратов упакованы в пластиковый футляр.

Все варианты исполнения наборов могут быть упакованы в один из двух видов пластиковых футляров.

В комплект каждого набора входит инструкция по применению.

Наименование	Вид пластикового футляра	Габаритные размеры пластикового футляра (Д*Ш*В, мм ± 10%)
1. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель ECONOLINE, варианты исполнения ROTH, MBT, STANDARD EDGEWISE (пазы 0.18", .022") 2. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022") 3. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель CROWN Mini, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022") 4. Набор брекетов ортодонтических металлических, самолигирующих, модель FLAIR SLT, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022") 5. Набор брекетов ортодонтических лингвальных, самолигирующих, металлических, модель EVOLUTION SLT Lingual (40°, 60°) 6. Набор брекетов ортодонтических лингвальных,	Футляр «малый» 	115*40*10

металлических, модель JOY Lingual (40°, 60°)

7. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU NICKEL FREE, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

8. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU SS, варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")


9. Набор брекетов ортодонтических металлических, модель BIJOU MASTER варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

10. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель CLEAR Ceramic варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

11. Набор брекетов ортодонтических керамических, модель DISCREET варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

12. Набор брекетов ортодонтических керамических, самолигирующих, модель BREEZE SL варианты исполнения ROTH, MBT (пазы 0.18", .022")

Футляр «большой»

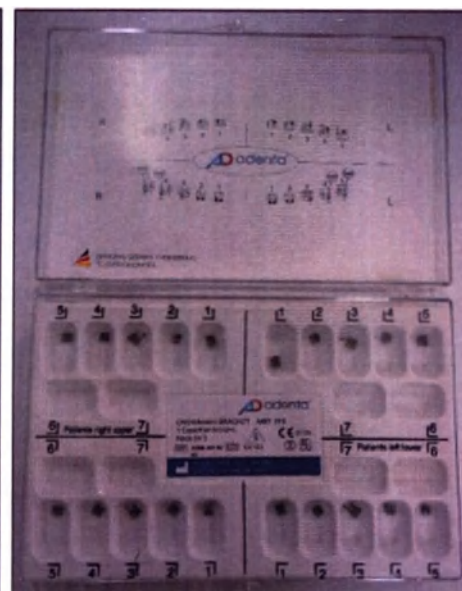

140* 90*20

Комплект поставки МИ

Комплект поставки МИ с указанием количества и вида изделий в пластиковом футляре указан в пункте «наименование медицинского изделия».

Характеристики транспортной упаковки:

Тип упаковки	Габаритные размеры	Масса
Коробка из двухслойного или трехслойного гофрокартона. Клапан коробки из гофрокартона заклеивается полиэтиленовой лентой с липким слоем	Размер подбирается в зависимости от объема заказа	Масса изменяется в зависимости от объема заказа


На поверхность групповой упаковки помещается этикетка, которая может содержать следующую информацию:

- название изделия на русском языке;
- название завода производителя;
- страна происхождения;
- номер по каталогу;
- номер партии;
- дата и номер Регистрационного удостоверения;
- знак соответствия при декларировании соответствия;
- предупредительные и информирующие знаки и надписи.

14. Информация об основных стадиях проектирования медицинского изделия и производственных процессах



Продолжение схемы на след. странице

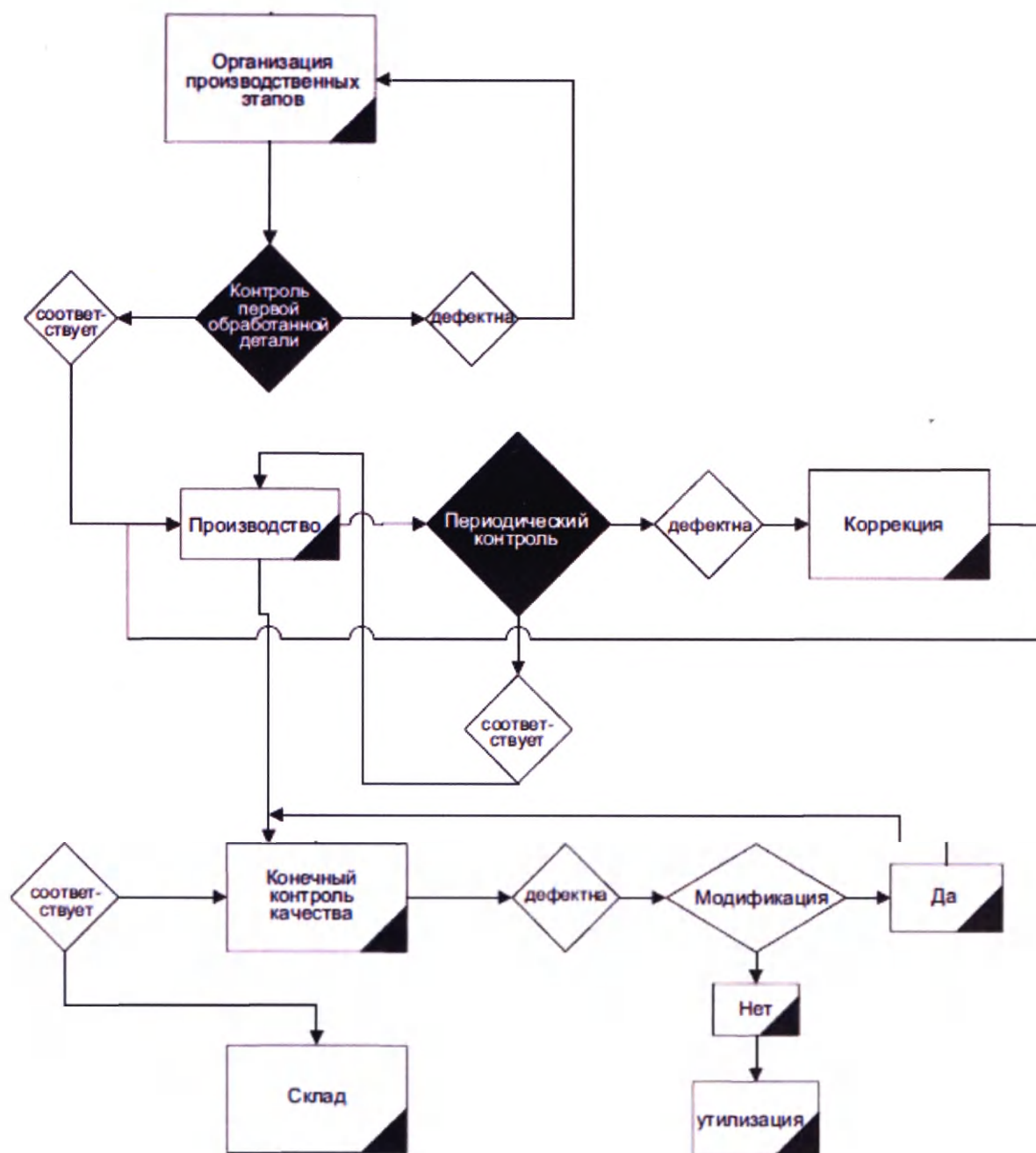

15. Информация в соответствии с данными государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения о содержащихся в медицинском изделии

Не применимо.

Данное изделие не содержит или вместе с ним не вводятся лекарственные вещества.

16. Описание метода стерилизации, сведения о методах валидации в отношении процесса стерилизации, о валидации процесса упаковывания для стерильных изделий

Не применимо.

Изделия не подлежат стерилизации.

17. Сведения и рекомендации по предварительной обработке и проверке изделий перед установкой пациенту.

Предварительная обработка

Предварительная обработка, очистка изделий: **не требуется.**

Наборы брекетов для формирования несъемных ортодонтических аппаратов поставляются в готовом для применения виде.

Проверка изделий перед установкой пациенту.

Перед установкой необходимо визуально проверить брекеты на предмет наличия повреждений.

Недопустимо применение брекетов с видимыми следами повреждений.

18. Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия

После использования утилизируйте инструмент в соответствии с правилами, принятыми в лечебном учреждении касательно биологически опасных или острых объектов.

Класс медицинских отходов в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21:

Класс А: *отходы, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО* – Неиспользованные брекеты с истекшим сроком годности, неиспользованные брекеты с нарушением целостности стерильной упаковки.

Класс Б: *отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности (эпидемиологически опасные отходы)* - После контакта с организмом пациента

19. Классификация МИ

Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия, в соответствии с номенклатурной классификацией 2а.

20. Побочные эффекты (возможные осложнения)

При использовании данного медицинского изделия побочных эффектов и осложнений выявлено не было

21. Способ применения и принципы действия медицинского изделия.

Внимание!

Продукция предназначена для применения только квалифицированными специалистами-ортодонтами, имеющими достаточную квалификацию для установки несъемных ортодонтических аппаратов (брекетов).

Принцип действия:

1. Установление требуемого состояния зубов

Тщательно проверьте каждый зуб на предмет наличия существенных повреждений эмали, чтобы избежать непредвиденного повреждения зубов во время дебондинга. Соблюдайте инструкции производителя по применению клея для брекетов, а также используйте таблицу клеев, приведенную в нашем каталоге ортодонтической продукции.

2. Извлечение и обработка

Захватите брекет Adenta мезиодистально, чтобы извлечь их из упаковки. При работе с ними соблюдайте следующие этапы. Избегайте касания основания брекетов пальцами или загрязнения иным путем, так как это может нарушить прочность крепления.

3. Нанесение клея для брекетов

Подготовьте клей для брекетов, пользуясь инструкциями производителя. Нанесите в центр основания брекета небольшое количество клея, достаточное для того, чтобы покрыть все его основание. Это позволит обеспечить оптимальную степень фиксации.

4. Размещение и позиционирование брекетов

После нанесения клея разместите брекет на зубе обычным способом.

Для удобства позиционирования используйте наружный контур брекетов. Обратите внимание, что паз иногда располагается не в центре брекета, что следует учитывать при позиционировании брекета!

Важно избегать контакта с антагонистом из-за риска истирания и (или) преждевременной потери брекета. При необходимости можно использовать небный подъем прикуса.

Необходимо следить, чтобы материал клея не попадал на крылья брекета с десенной или окклюзионной стороны, так как это может ограничить возможность лигирования.

До начала отверждения клея необходимо удалить все его излишки. Это особенно важно для того, чтобы обеспечить легкий дебондинг в конце лечения.

5. Лигирование дуг.

Следует соблюдать время отверждения клея согласно инструкциям производителя. После отверждения клея проведите лигирование проволокой или эластичной лигатурой по обычной методике.

6. Дебондинг брекетов

Захватите брекет мезиодистально за крючки и поверните влево или вправо, не стягивая его с зуба.

Внимание!

Медицинский персонал должен работать в одноразовых перчатках.

Условия для распаковывания

Специальные условия для распаковывания МИ отсутствуют.

Следует руководствоваться общими условиями эксплуатации:

	Температура окр. среды, °C	Влажность воздуха (относительная), без образования конденсата
Эксплуатация (помещение)	От +10 до +32	<75%

Обращаем Ваше внимание, что данная продукция предназначена только для профессионального использования.

Письменные инструкции не могут охватить все возможные ситуации, которые могут возникнуть в ходе использования брекетов, поэтому специалист должен обладать определенным уровнем квалификации для использования указанной продукции.

Марка, производитель, регистрационное удостоверение клея для брекетов для возможности использования на территории Российской Федерации

Марка	Производитель	Регистрационное удостоверение
- Трансбонд ХТ Лайт Кьюэ Эдхизив (Transbond XT Edhesive)	"3М Юнитек Корпорейшн", США	ФСЗ 2008/01284 от 14.08.2017

Light Cure Adhesive). - Трансбонд LR Лайт Кьюэ Эдхизив (Transbond LR Light Cure Adhesive). - Трансбонд Плас Лайт Кьюэ Бэнд Эдхитив (Transbond Plus Light Cure Band Adhesive). - Юнит Бондинг Эдхизив (Unite Bonding Adhesive). - Сандхай Рапид-Сет Индирект Бондинг Эдхизив (Sondhi Rapid-Set Indirect Bonding Adhesive).		
- Резилайнс Лайт Кьюэ Флоуэйбл Композит (LV Resilience Light-Cure Flowable Composite). - Резилайнс Лайт Кьюэ Ортодонтик Эдхизив (Resilience Light-Cure Orthodontic Adhesive). - Резилайнс Ноу_Микс Ортодонтик Эдхизив (Resilience No-Mix Orthodontic Adhesive).	“Орто Технолоджи Инк.”, США	ФСЗ 2010/08629 от 07.12.2016

22. Ожидаемый срок эксплуатации, срок годности

Срок эксплуатации составляет - 5 лет.

Гарантийный срок годности: 5 лет.

23. Условия транспортировки, хранения, эксплуатации

	Температура окр. среды, °С	Влажность воздуха (относительная), без образования конденсата
Хранение, эксплуатация (помещение)	От +10 до +32	<75%
Транспортировка	От -35 до +40	30-95%

В ходе эксплуатации МИ устойчиво к воздействию физиологических жидкостей организма (относительная влажность 100%), температурному воздействию до + 42 °С.

Данные медицинские изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

24. Гарантийные обязательства

Компания Adenta GmbH не предоставляет гарантий, выраженных или подразумеваемых, в связи с продажей изделий, указанных в настоящей эксплуатационной документации, и не

принимает на себя обязательств по гарантиям товарного состояния или пригодности для применения. Компания Adenta GmbH не несет ответственности за травмы или повреждения, связанные с выбором и использованием изделий для конкретного пациента или любого состояния пациента.

Срок эксплуатации составляет - 5 лет.

Гарантийный срок годности: 5 лет.

25. Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

EN 980	Символы графические для маркировки медицинских изделий
EN 1041	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
EN ISO 13485	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования.
EN ISO 14971	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.
EN ISO 15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
Серия стандартов EN ISO 10993	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.

26. Производитель, разработчик:

Наименование: Адента ГмбХ / Adenta GmbH.

Адрес: Gutenbergstr. 9, 82205 Gilching, Germany (Германия)

Телефон: +49-8105-734360

e-mail: adenta@adenta.com

Место производства:

Adenta GmbH, Gutenbergstr. 9, 82205 Gilching, Germany

27. Информация об уполномоченном представителе

Общество с Ограниченной Ответственностью «ДиЭСТА»

Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.4А, стр.23

Телефон: +7(495) 955-01-02

e-mail: diesta1@mail.ru

diesta2@gmail.com


UR-Nr. B 2051/2021

Ich beglaubige die Echtheit der vorstehenden, vor mir anerkannten Unterschrift
von

Herrn Claus-Dieter Schendell-Gröling, geboren am 13. Juli 1954,
82205 Gilching, Am Stockerfeld 8,

ausgewiesen durch einen amtlichen Lichtbildausweis.

Starnberg, den 19.08.2021

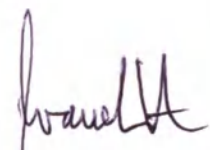

Dr. Brandmüller,
Notar

2051

УТВЕРЖДАЮ

Adenta GmbH / Адента ГмбХ

Генеральный директор

(должность)

Клаус-Дитер Шэнделл-Грёлинг

(имя)

/подпись/

(подпись)

19.08.2021

Штамп компании: adenta GmbH / адента ГмбХ

Гутенбергштрассе 9

D-82205 г. Гильхинг

Тел.: +49 (0)8105 73 43 6-0

Факс: +49 (0)8105 73 43 6-22

www.adenta.com

№ в реестре В 2051/2021

Настоящим я подтверждаю подлинность подписи на обороте, поставленной в моем присутствии

Г-ном Клаусом-Дитером Шэнделл-Грёлинг, дата рождения: 13 июля 1954 г.,
82205 г. Гильхинг, Ам Штокерфельд 8,
личность подтверждена удостоверением личности с фотографией.

Штарнберг, 19.08.2021

/Подпись/

Др. Брандмюллер
Нотариус

Тисненная печать нотариуса

переводчик Яйлоян Давид Георгиевич

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого августа две тысячи двадцать первого года


Я, Моисеева Лилия Владимировна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Яйлояна Давида Георгиевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/995-н/77-2021-16-988

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

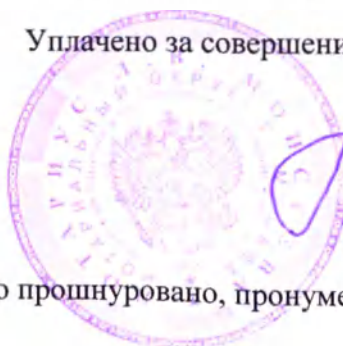

Л.В.Моисеева

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 55 лист(-а,-ов).

Л.В.Моисеева

Л.В.Моисеева

